

02168509

中国国际贸易促进委员会 中国国际商会



China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



243301A0/007750

号码 No.

兹证明：在所附文件上的常州赛乐医疗技术有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of CHANGZHOU SIFARY MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD on the annexed DOCUMENT is genuine.

China Council for the Promotion
of International Trade



授权签字:

Authorized
Signature:

Zhang Shaoya

日期: 2024年06月07日

(Date: Jun. 07, 2024)

证明 查询网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

«УТВЕРЖДАЮ» / "APPROVE"

Чанчжоу Сифари Медикал Технолоджи Ко. Лтд./
Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd.

Генеральный директор/General Director

(должность/position)

Тяо Хуань / Tao Huan

(имя/name)

31.05.2024

(Дата/Date)

(подпись/signature)

М.П. - Stamp



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Версия 1.1

Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых
каналов «Eighteeth»

INSTRUCTIONS FOR USE
OF MEDICAL DEVICE

Version 1.1

Instrument endodontic machine non-sterile for the treatment of root canals "Eighteeth"



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Версия 1.1

**Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых
каналов «Eighteeth»**

Содержание

1. НАИМЕНОВАНИЕ	4
2. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ	4
3. НАЗНАЧЕНИЕ.....	43
4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	43
5. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ.....	43
6. ПОКАЗАНИЯ.....	43
7. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.....	43
8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	43
9. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ	44
10. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ	44
11. КЛАССИФИКАЦИЯ	44
12. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КОНТАКТА С ОРГАНИЗМОМ.....	44
13. ОПИСАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	44
14. МАТЕРИАЛЫ.....	100
15. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	100
16. ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ.....	100
17. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	105
18. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.....	105
19. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	105
20. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	105
21. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	105
22. ГАРАНТИИ.....	107
23. ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ.....	107
24. УТИЛИЗАЦИЯ.....	110
25. СТАНДАРТЫ	110
26. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.....	112

1. НАИМЕНОВАНИЕ

Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth» (далее - изделие, инструмент(ы), эндодонтические инструменты).

2. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

1. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор варианты исполнения:

1. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX-007-6 шт./ блистер, в составе:

-размер 1708, длина 19 мм - 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

2. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX-021-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 3504, длина 25 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

3. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX-030-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 2506, длина 25 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

4. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX-078-6 шт./блистер, в составе:

- размер 1506, длина 21 мм – 1 шт.

- размер 2006, длина 21 мм – 1 шт.

- размер 2506, длина 21 мм – 1 шт.

- размер 3006, длина 21 мм – 1 шт.

- размер 3506, длина 21 мм – 1 шт.

- размер 4006, длина 21 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

5. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX-079-6 шт./блистер, в составе:

- размер 1506, длина 25 мм – 1 шт.

- размер 2006, длина 25 мм – 1 шт.

- размер 2506, длина 25 мм – 1 шт.

- размер 3006, длина 25 мм – 1 шт.

- размер 3506, длина 25 мм – 1 шт.

- размер 4006, длина 25 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

6. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX-080-6 шт./блистер, в составе:

- размер 1506, длина 31 мм – 1 шт.

- размер 2006, длина 31 мм – 1 шт.

- размер 2506, длина 31 мм – 1 шт.

- размер 3006, длина 31 мм – 1 шт.

- размер 3506, длина 31 мм – 1 шт.

- размер 4006, длина 31 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

7. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX-081-6 шт./ блистер, в составе:

-размер 4004, длина 21 мм - 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

8. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX-082-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 4004, длина 25 мм - 6 шт.
- счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 9. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX-083-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 4504, длина 21 мм - 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 10. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX-084-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 4504, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 11. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX-093-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 2504, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 12. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX-094-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 3004, длина 25 мм - 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 13. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX BLUE-089-5 шт./ блистер, в составе:
 - размер 2504, длина 25 мм - 5 шт.
 - счетчик использования инструмента – 5 шт.
- 14. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX BLUE-007-4 шт./блистер, в составе:
 - размер 1708, длина 19 мм – 1 шт.
 - размер 2006, длина 21 мм– 1 шт.
 - размер 2506, длина 21 мм– 1 шт.
 - размер 3006 длина 21 мм– 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
- 15. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX BLUE-008-4 шт./блистер, в составе:
 - размер 1708, длина 19 мм – 1 шт.
 - размер 2006, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 2506, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 3006 длина 25 мм– 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
- 16. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX BLUE-009-4 шт./блистер, в составе:
 - размер 1708, длина 19 мм – 1 шт.
 - размер 2006, длина 31 мм– 1 шт.
 - размер 2506, длина 31 мм– 1 шт.
 - размер 3006 длина 31 мм– 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
- 17. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX BLUE-011-5 шт./блистер, в составе:
 - размер 1708, длина 19 мм – 1 шт.
 - размер 2006, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 2506, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 3006 длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 3506 длина 25 мм– 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 5 шт.
- 18. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых

- каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-021-6 шт./ блистер, в составе:
-размер 4004, длина 31 мм - 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
19. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-022-6 шт./ блистер, в составе:
-размер 1506, длина 21 мм - 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
20. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-025 -6 шт./ блистер, в составе:
- размер 2506, длина 21 мм - 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
21. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-028-6 шт./ блистер, в составе:
-размер 4006, длина 21 мм - 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
22. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-030-6 шт./ блистер, в составе:
-размер 4006, длина 31 мм - 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
23. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-031-4 шт./блистер, в составе:
-размер 2504, длина 25 мм – 2 шт.
-размер 2506, длина 25 мм– 2 шт.
-счетчик использования инструмента – 4 шт.
24. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-039-6 шт./блистер, в составе:
-размер 1506, длина 25 мм – 1 шт.
-размер 2006, длина 25 мм– 1 шт.
-размер 2506, длина 25 мм– 1 шт.
-размер 3006, длина 25 мм– 1 шт.
-размер 3506, длина 25 мм– 1 шт.
-размер 4006, длина 25 мм – 1 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
25. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-047-6 шт./ блистер, в составе:
-размер 3004, длина 25 мм - 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
26. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-048-6 шт./ блистер, в составе:
-размер 3504, длина 25 мм - 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
27. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-049-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 4004, длина 25 мм - 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
28. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-050-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 1506, длина 25 мм - 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
29. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-051-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 2006, длина 25 мм - 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

30. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-052-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 2506, длина 25 мм - 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

31. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-053-6 шт./ блистер, в составе:

-размер 3006, длина 25 мм - 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

32. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-054-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 3506, длина 25 мм - 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

33. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-055-6 шт./ блистер, в составе:

-размер 4006, длина 25 мм - 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

34. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-060-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 2504, длина 31 мм - 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

35. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-061-6 шт./ блистер, в составе:

-размер 1506, длина 31 мм - 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

36. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-062 -6 шт./ блистер, в составе:

-размер 2006, длина 31 мм - 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

37. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-066-6 шт./блистер, в составе:

-размер 1506, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 2006, длина 21 мм– 1 шт.

-размер 2506, длина 21 мм– 1 шт.

-размер 3006, длина 21 мм– 1 шт.

-размер 3506, длина 21 мм– 1 шт.

-размер 4006, длина 21 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

38. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-067-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 4004, длина 21 мм - 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

39. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-068-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 1708, длина 19 мм - 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

40. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-070-6 шт./ блистер, в составе:

-размер 2504, длина 21 мм - 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

41. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-071-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 3004, длина 21 мм - 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
42. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-082-6 шт/блистер, в составе:
- размер 1708, длина 19 мм – 1 шт.
 - размер 1506, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 2006, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 2506, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 3006, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 3506, длина 25 мм – 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
43. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-086-6 шт./блистер, в составе:
- размер 1708, длина 19 мм – 1 шт.
 - размер 1506, длина 21 мм– 1 шт.
 - размер 2006, длина 21 мм– 1 шт.
 - размер 2506, длина 21 мм– 1 шт.
 - размер 3006, длина 21 мм– 1 шт.
 - размер 3506, длина 21 мм – 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
44. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-098-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 2006, длина 21 мм - 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
45. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-099 -6 шт./ блистер, в составе:
- размер 3004, длина 31 мм - 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
46. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-100-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 3504, длина 31 мм - 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
47. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-112-4 шт./блистер, в составе:
- размер 4504, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 5004, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 5504, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 6004, длина 25 мм– 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
48. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-113-4 шт./блистер, в составе:
- размер 4504, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 5004, длина 31 мм– 1 шт.
 - размер 5504, длина 31 мм– 1 шт.
 - размер 6004, длина 31 мм– 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
49. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-131-6 шт./блистер, в составе:
- размер 1506, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 2006, длина 31 мм– 1 шт.
 - размер 2506, длина 31 мм– 1 шт.
 - размер 3006, длина 31 мм– 1 шт.

- размер 3506, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 4006, длина 31 мм – 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
50. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX BLUE-132-6 шт./блистер, в составе:
- размер 1506, длина 21 мм – 1 шт.
 - размер 2006, длина 21 мм – 1 шт.
 - размер 2506, длина 21 мм – 1 шт.
 - размер 3006, длина 21 мм – 1 шт.
 - размер 3506, длина 21 мм – 1 шт.
 - размер 4006, длина 21 мм – 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
51. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX BLUE-139-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 4504, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
52. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX BLUE-140 -6 шт./ блистер, в составе:
- размер 4504, длина 21 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
53. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX BLUE-141-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 4504, длина 31 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
54. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX BLUE-142 -6 шт./ блистер, в составе:
- размер 5004, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
55. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX BLUE-143-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 5004, длина 21 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
56. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX BLUE-144-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 5004, длина 31 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
57. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX BLUE-145-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 5504, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
58. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX BLUE-146-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 5504, длина 21 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
59. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX BLUE-147 -6 шт./ блистер, в составе:
- размер 5504, длина 31 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
60. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX BLUE-148-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 6004, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.

61. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-149-6 шт./ блистер, в составе:
-размер 6004, длина 21 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
62. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-150-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 6004, длина 31 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
63. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-160-6 шт./ блистер, в составе:
-размер 2506, длина 31 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
64. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-161-6 шт./ блистер, в составе:
-размер 3006, длина 21 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
65. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-162-6 шт./ блистер, в составе:
-размер 3006, длина 31 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
66. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-163 -6 шт./ блистер, в составе:
-размер 3506, длина 21 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
67. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-164 -6 шт./ блистер, в составе:
-размер 3506, длина 31 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
68. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-221-6 шт./блистер, в составе:
-размер 2504, длина 25 мм – 3 шт.
-размер 2506, длина 25 мм – 3 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
69. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-235-5 шт./блистер, в составе:
-размер 1708, длина 19 мм – 1 шт.
-размер 1506, длина 21 мм – 1 шт.
-размер 2006, длина 21 мм – 1 шт.
-размер 2506, длина 21 мм – 1 шт.
-размер 3006, длина 21 мм – 1 шт.
-счетчик использования инструмента – 5 шт.
70. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-236-5 шт./блистер, в составе:
-размер 1708, длина 19 мм – 1 шт.
-размер 1506, длина 25 мм – 1 шт.
-размер 2006, длина 25 мм – 1 шт.
-размер 2506, длина 25 мм – 1 шт.
-размер 3006, длина 25 мм – 1 шт.
-счетчик использования инструмента – 5 шт.
71. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-243 -3 шт./блистер, в составе:
-размер 2504, длина 25 мм – 1 шт.

- размер 3004, длина 25 мм – 1 шт.
- размер 3504, длина 25 мм – 1 шт.
- счетчик использования инструмента – 3 шт.
- 72. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX BLUE-244 -3 шт./блистер, в составе:
 - размер 2504, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 3004, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 3504, длина 31 мм – 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 3 шт.
- 73. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX BLUE-245 -3 шт./блистер, в составе:
 - размер 2504, длина 21 мм – 1 шт.
 - размер 3004, длина 21 мм – 1 шт.
 - размер 3504, длина 21 мм – 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 3 шт.
- 74. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX BLUE-249-5 шт./ блистер, в составе:
 - размер 3504, длина 21 мм -5 шт.
 - счетчик использования инструмента – 5 шт.
- 75. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX GOLD-009-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 3004, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 76. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX GOLD-011-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 1506, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 77. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX GOLD-016-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 2006, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 78. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX GOLD-040-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 4004, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 79. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX GOLD-041 -6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 3506, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 80. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX GOLD-042-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 4006, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 81. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX GOLD-049-6 шт./блистер, в составе:
 - размер 1708, длина 19 мм – 1 шт.
 - размер 1506, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 2006, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 2506, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 3006, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 3506, длина 25 мм – 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.

82. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-083-6 шт./ блистер, в составе:
-размер 3504, длина 25 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
83. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-096-6 шт./ блистер, в составе:
-размер 3006, длина 25 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
84. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-107-6 шт./ блистер, в составе:
-размер 3004, длина 31 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
85. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-109 -6 шт./ блистер, в составе:
-размер 3504, длина 31 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
86. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-110-6 шт./ блистер, в составе:
-размер 4004, длина 21 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
87. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-111-6 шт./ блистер, в составе:
-размер 4004, длина 31 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
88. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-112-6 шт./ блистер, в составе:
-размер 1506, длина 21 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
89. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-113-6 шт./ блистер, в составе:
-размер 1506, длина 31 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
90. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-119-6 шт./ блистер, в составе:
-размер 1708, длина 19 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
91. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-127-6 шт./ блистер, в составе:
-размер 2504, длина 25 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
92. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-128-6 шт./ блистер, в составе:
-размер 2506, длина 25 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
93. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-148-6 шт./ блистер, в составе:
-размер 2504, длина 31 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
94. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-156-6 шт./блистер, в составе:
-размер 1505, длина 21 мм – 2 шт.
-размер 2006, длина 25 мм – 2 шт.

-размер 2506, длина 25 мм – 2 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

95. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-161-6 шт./блистер, в составе:

-размер 1708, длина 19 мм – 1 шт.

-размер 1506, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 2006, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 2506, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 3006, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 3506, длина 21 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

96. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-162-6 шт./блистер, в составе:

-размер 1708, длина 19 мм – 1 шт.

-размер 1506, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 2006, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 2506, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 3006, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 3506, длина 31 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

97. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-169-5 шт./ блистер, в составе:

-размер 2504, длина 21 мм – 5 шт.

-счетчик использования инструмента – 5 шт.

98. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-170-5 шт./ блистер, в составе:

-размер 2506, длина 21 мм – 5 шт.

-счетчик использования инструмента – 5 шт.

99. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-171-6 шт./ блистер, в составе:

-размер 2506, длина 31 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

100. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-172-6 шт./блистер, в составе:

-размер 1506, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 2006, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 2506, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 3006, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 3506, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 4006, длина 21 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

101. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-173-6 шт./блистер, в составе:

-размер 1506, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 2006, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 2506, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 3006, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 3506, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 4006, длина 25 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

102. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-174-6 шт./блистер, в составе:

- размер 1506, длина 31 мм – 1 шт.
- размер 2006, длина 31 мм – 1 шт.
- размер 2506, длина 31 мм – 1 шт.
- размер 3006, длина 31 мм – 1 шт.
- размер 3506, длина 31 мм – 1 шт.
- размер 4006, длина 31 мм – 1 шт.
- счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 103. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-드릴бор, E-FLEX GOLD-180 -6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 4504, длина 21 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 104. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-드릴бор, E-FLEX GOLD-181-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 4504, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 105. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-드릴бор, E-FLEX GOLD-182-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 5004, длина 21 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 106. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-드릴бор, E-FLEX GOLD-183-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 5004, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 107. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-드릴бор, E-FLEX GOLD-184-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 5504, длина 21 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 108. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-드릴бор, E-FLEX GOLD-185-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 5504, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 109. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-드릴бор, E-FLEX GOLD-232-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 4006, длина 21 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 110. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-드릴бор, E-FLEX GOLD-233-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 1712, длина 19 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 111. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-드릴бор, E-FLEX GOLD-236-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 2004, длина 21 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 112. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-드릴бор, E-FLEX GOLD-237-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 2004, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 113. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-드릴бор, E-FLEX GOLD-241-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 3004, длина 21 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 114. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых

каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-244-6 шт./ блистер, в составе:

-размер 3506, длина 21 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

115. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-253-3 шт./блистер, в составе:

-размер 2504, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 3004, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 3504, длина 25 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 3 шт.

116. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-254-3 шт./блистер, в составе:

-размер 2504, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 3004, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 3504, длина 21 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 3 шт.

117. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-255-3 шт./блистер, в составе:

-размер 2504, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 3004, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 3504, длина 31 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 3 шт.

118. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-295-6 шт./ блистер, в составе:

-размер 2006, длина 31 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

119. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-001-5 шт./блистер, в составе:

-размер 1904v, длина 19 мм – 1 шт.

-размер 1802v, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 2004v, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 2007v, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 2508v, длина 21 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 5 шт.

120. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-002-6 шт./блистер, в составе:

-размер 1904v, длина 19 мм – 1 шт.

-размер 1802v, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 2004v, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 2007v, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 2508v, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 3009v, длина 25 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

121. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-003- 6 шт./блистер, в составе:

-размер 1904v, длина 19 мм – 1 шт.

-размер 1802v, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 2004v, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 2007v, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 2508v, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 3009v, длина 31 – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

122. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых

135. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых

каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-018-6 шт./ блистер, в составе:

-размер 2508v, длина 31 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

136. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-019-6 шт./ блистер, в составе:

-размер 3009v, длина 21 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

137. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-020-6 шт./ блистер, в составе:

-размер 3009v, длина 25 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

138. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-022-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 1904v, длина 19 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

139. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-023-6 шт./блистер, в составе:

-размер 4006v, длина 25 мм – 3 шт.

-размер 5005v, длина 25 мм – 3 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

140. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-024-6 шт./блистер, в составе:

-размер 1904v, длина 19 мм – 1 шт.

-размер 1802v, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 2004v, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 2007v, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 2508v, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 3009v, длина 21 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

141. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-025-6 шт./блистер, в составе:

-размер 1904v, длина 19 мм – 1 шт.

-размер 1802v, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 2004v, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 2007v, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 2508v, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 4006v, длина 25 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

142. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-026-6 шт./блистер, в составе:

-размер 1904v, длина 19 мм – 1 шт.

-размер 1802v, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 2004v, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 2007v, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 2508v, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 5005v, длина 31 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

143. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-027-6 шт./ блистер, в составе:

-размер 4006v, длина 25 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

144. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых

- каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-028-6 шт./ блистер, в составе:
 -размер 5005v, длина 25 мм – 6 шт.
 -счетчик использования инструмента – 6 шт.
145. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-041-6 шт./ блистер, в составе:
 -размер 1802v, длина 25 мм – 6 шт.
 -счетчик использования инструмента – 6 шт.
146. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-042-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 2004v, длина 25 мм – 6 шт.
 -счетчик использования инструмента – 6 шт.
147. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-043-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 1904v, длина 19 мм – 6 шт.
 -счетчик использования инструмента – 6 шт.
148. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-044-6 шт./ блистер, в составе:
 -размер 2007v, длина 25 мм – 6 шт.
 -счетчик использования инструмента – 6 шт.
149. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-045-6 шт./ блистер, в составе:
 -размер 2508v, длина 25 мм – 6 шт.
 -счетчик использования инструмента – 6 шт.
150. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-046-6 шт./ блистер, в составе:
 -размер 3009v, длина 25 мм – 6 шт.
 -счетчик использования инструмента – 6 шт.
151. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-050-3 шт./блистер, в составе:
 -размер 1904v, длина 19 мм – 1 шт.
 -размер 2004v, длина 25 мм – 1 шт.
 -размер 2007v, длина 25 мм – 1 шт.
 -счетчик использования инструмента – 3 шт.
152. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-051-3 шт./блистер, в составе:
 -размер 1904v, длина 19 мм – 1 шт.
 -размер 2004v, длина 31 мм – 1 шт.
 -размер 2007v, длина 31 мм – 1 шт.
 -счетчик использования инструмента – 3 шт.
153. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-052-3 шт./блистер, в составе:
 -размер 1904v, длина 19 мм – 1 шт.
 -размер 2004v, длина 21 мм – 1 шт.
 -размер 2007v, длина 21 мм – 1 шт.
 -счетчик использования инструмента – 3 шт.
154. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-053-5 шт./блистер, в составе:
 -размер 1904v, длина 19 мм – 1 шт.
 -размер 1802v, длина 25 мм – 1 шт.
 -размер 2004v, длина 25 мм – 1 шт.
 -размер 2007v, длина 25 мм – 1 шт.
 -размер 2508v, длина 25 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 5 шт.

155. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX S-055-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 1802v, длина 31 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

156. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX S-056-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 2004v, длина 31 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

157. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX S-057-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 2007v, длина 31 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

158. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX S-058-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 2508v, длина 31 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

159. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX S-059-6 шт./блистер, в составе:

-размер 1904v, длина 19 мм – 1 шт.

-размер 1802v, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 2004v, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 2007v, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 2508v, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 3009v, длина 31 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

160. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX S-060-6 шт./ блистер, в составе:

-размер 1802v, длина 21 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

161. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX S-061-6 шт./ блистер, в составе:

-размер 2004v, длина 21 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

162. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX S-062-6 шт./ блистер, в составе:

-размер 2007v, длина 21 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

163. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX S-063-6 шт./ блистер, в составе:

-размер 2508v, длина 21 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

164. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX S-064-6 шт./блистер, в составе:

-размер 1904v, длина 19 мм – 1 шт.

-размер 1802v, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 2004v, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 2007v, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 2508v, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 3009v, длина 21 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

165. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых

каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-078-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 3005v, длина 21 мм – 6 шт.
 -счетчик использования инструмента – 6 шт.

179. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-079-6 шт./ блистер, в составе:
 -размер 3005v, длина 25 мм – 6 шт.
 -счетчик использования инструмента – 6 шт.

180. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-080-6 шт./ блистер, в составе:
 -размер 3005v, длина 31 мм – 6 шт.
 -счетчик использования инструмента – 6 шт.

181. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-081-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 4005v, длина 21 мм – 6 шт.
 -счетчик использования инструмента – 6 шт.

182. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-082-6 шт./ блистер, в составе:
 -размер 4005v, длина 25 мм – 6 шт.
 -счетчик использования инструмента – 6 шт.

183. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-083-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 4005v, длина 31 мм – 6 шт.
 -счетчик использования инструмента – 6 шт.

184. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-084 -6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 5005v, длина 21 мм – 6 шт.
 -счетчик использования инструмента – 6 шт.

185. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-085-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 5005v, длина 25 мм – 6 шт.
 -счетчик использования инструмента – 6 шт.

186. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-086-6 шт./ блистер, в составе:
 -размер 5005v, длина 31 мм – 6 шт.
 -счетчик использования инструмента – 6 шт.

187. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-087-6 шт./блистер, в составе:
 -размер 1802v, длина 19 мм – 1 шт.
 -размер 1402v, длина 21 мм – 1 шт.
 -размер 1702v, длина 21 мм – 1 шт.
 -размер 1905v, длина 21 мм – 1 шт.
 -размер 2505v, длина 21 мм – 1 шт.
 -размер 3005v, длина 21 мм – 1 шт.
 -счетчик использования инструмента – 6 шт.

188. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-088-6 шт./блистер, в составе:
 -размер 1802v, длина 19 мм – 1 шт.
 -размер 1402v, длина 25 мм – 1 шт.
 -размер 1702v, длина 25 мм – 1 шт.
 -размер 1905v, длина 25 мм – 1 шт.
 -размер 2505v, длина 25 мм – 1 шт.
 -размер 3005v, длина 25 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

189. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-089-6 шт./блистер, в составе:

-размер 1802v, длина 19 мм – 1 шт.

-размер 1402v, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 1702v, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 1905v, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 2505v, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 3005v, длина 31 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

190. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-090-4 шт./блистер, в составе:

-размер 1402v, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 1702v, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 1905v, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 2505v, длина 21 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 4 шт.

191. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-091-4 шт./блистер, в составе:

-размер 1402v, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 1702v, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 1905v, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 2505v, длина 25 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 4 шт.

192. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-092-4 шт./блистер, в составе:

-размер 1402v, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 1702v, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 1905v, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 2505v, длина 31 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 4 шт.

193. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-096-6 шт./ блистер, в составе:

-размер 2004v, длина 21 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

194. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-097-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 2004v, длина 25 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

195. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-098-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 2004v, длина 31 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

196. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-099-6 шт./ блистер, в составе:

-размер 2504v, длина 21 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

197. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-100-6 шт./ блистер, в составе:

-размер 2504v, длина 25 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

198. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых

каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX S-101-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 2504v, длина 31 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

199. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX MINI-003-6 шт./блистер, в составе:

-размер 2006, длина 16 мм – 2 шт.

-размер 2506, длина 16 мм – 2 шт.

-размер 3006, длина 16 мм – 2 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

200. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX MINI-006-4 шт./блистер, в составе:

-размер 1708, длина 10 мм – 1 шт.

-размер 2006, длина 16 мм – 1 шт.

-размер 2506, длина 16 мм – 1 шт.

-размер 3006, длина 16 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 4 шт.

201. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX MINI-007-4 шт./ блистер, в составе:

-размер 1708, длина 10 мм – 4 шт.

-счетчик использования инструмента – 4 шт.

202. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX MINI-010 -6 шт./ блистер, в составе:

- размер 3004, длина 16 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

203. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX MINI-012-3 шт./блистер, в составе:

-размер 2006, длина 16 мм – 1 шт.

-размер 2506, длина 16 мм – 1 шт.

-размер 3006, длина 16 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 3 шт.

204. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX MINI-013-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 2504, длина 16 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

205. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-151 -6 шт./ блистер, в составе:

-размер 7004, длина 25 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

206. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-152-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 7004, длина 21 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

207. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-153-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 7004, длина 31 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

208. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-157-6 шт./блистер, в составе:

-размер 4504, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 5004, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 5504, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 6004, длина 25 мм – 1 шт.

- размер 7004, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 8004, длина 25 мм – 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
209. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-158-6 шт./блистер, в составе:
- размер 4504, длина 21 мм – 1 шт.
 - размер 5004, длина 21 мм – 1 шт.
 - размер 5504, длина 21 мм – 1 шт.
 - размер 6004, длина 21 мм – 1 шт.
 - размер 7004, длина 21 мм – 1 шт.
 - размер 8004, длина 21 мм – 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
210. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-159-6 шт./блистер, в составе:
- размер 4504, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 5004, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 5504, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 6004, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 7004, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 8004, длина 31 мм – 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
211. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-231-6 шт./блистер, в составе:
- размер 4504, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 5004, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 5504, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 6004, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 7004, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 8004, длина 25 мм – 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
212. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-303-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 7004, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
213. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-154-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 8004, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
214. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-155 -6 шт./ блистер, в составе:
- размер 8004, длина 21 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
215. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX BLUE-156-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 8004, длина 31 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
216. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрельбор, E-FLEX GOLD-304-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 8004, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- II. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, варианты исполнения:

1. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX-009-6 шт./блистер, в составе:
 - размер 1504, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
2. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX-040-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 1902, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
3. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX-045-6 шт./блистер, в составе:
 - размер 1302, длина 25 мм – 2 шт.
 - размер 1602, длина 25 мм– 2 шт.
 - размер 1902, длина 25 мм– 2 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
4. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX-067- 4 шт./блистер, в составе:
 - размер 1302, длина 25 мм – 2 шт.
 - размер 1503 длина 25 мм– 2 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
5. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX-068-6 шт./блистер, в составе:
 - размер 1302, длина 21 мм – 2 шт.
 - размер 1602, длина 21 мм– 2 шт.
 - размер 1902, длина 21 мм– 2 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
6. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX-086-4 шт./блистер, в составе:
 - размер 1302, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 1602, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 1902, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 1503, длина 25 мм– 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
7. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX-088-4 шт./ блистер, в составе:
 - размер 1503, длина 21 мм – 4 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
8. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX-089-4 шт./ блистер, в составе:
 - размер 1503, длина 25 мм – 4 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
9. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX-092-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 2004, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
10. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX-096-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 1602, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
11. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX-097-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 1302, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.

12. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX-099-4 шт./блистер, в составе:
- размер 1302, длина 21 мм – 1 шт.
 - размер 1602, длина 21 мм – 1 шт.
 - размер 1902, длина 21 мм – 1 шт.
 - размер 1503, длина 21 мм – 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
13. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX-106-4 шт./блистер, в составе:
- размер 1302, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 1602, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 1902, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 1503, длина 31 мм – 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
14. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX-107-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 1002, длина 31 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
15. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE-013-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 1504, длина 21 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
16. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE-045-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 2004, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
17. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE-058-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 1504, длина 31 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
18. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE-059-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 2004, длина 31 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
19. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE-069-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 2004, длина 21 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
20. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE-096 -5 шт./ блистер, в составе:
- размер 1604, длина 25 мм – 5 шт.
 - счетчик использования инструмента – 5 шт.
21. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE-104-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 1902, длина 21 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
22. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE-105-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 1302, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
23. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE-106-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 1602, длина 25 мм – 6 шт.
- счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 24. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE -110-4 шт./блистер, в составе:
 - размер 4502, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 5002, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 5502, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 6002, длина 25 мм– 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
- 25. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE -111-4 шт./блистер, в составе:
 - размер 4502, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 5002, длина 31 мм– 1 шт.
 - размер 5502, длина 31 мм– 1 шт.
 - размер 6002, длина 31 мм– 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
- 26. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE-121-5 шт./ блистер, в составе:
 - размер 1504, длина 25 мм – 5 шт.
 - счетчик использования инструмента – 5 шт.
- 27. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE -122-4 шт./блистер, в составе:
 - размер 1302, длина 25 мм – 2 шт.
 - размер 1503, длина 25 мм– 2 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
- 28. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE -125-6 шт./блистер, в составе:
 - размер 1302, длина 25 мм – 2 шт.
 - размер 1602, длина 25 мм– 2 шт.
 - размер 1902, длина 25 мм– 2 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 29. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE-129-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 1602, длина 21 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 30. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE-130-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 1503, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 31. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE-134-4 шт./блистер, в составе:
 - размер 1302, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 1602, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 1902, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 1503, длина 25 мм– 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
- 32. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE -136-4 шт./блистер, в составе:
 - размер 1303, длина 25 мм – 2 шт.
 - размер 1504, длина 25 мм– 2 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
- 33. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых

каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE -186-4 шт./блистер, в составе:

- размер 1302, длина 21 мм – 1 шт.
- размер 1602, длина 21 мм– 1 шт.
- размер 1902, длина 21 мм– 1 шт.
- размер 1503, длина 21 мм– 1 шт.
- счетчик использования инструмента – 4 шт.

34. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE -187-4 шт./блистер, в составе:

- размер 1302, длина 31 мм – 1 шт.
- размер 1602, длина 31 мм– 1 шт.
- размер 1902, длина 31 мм– 1 шт.
- размер 1503, длина 31 мм– 1 шт.
- счетчик использования инструмента – 4 шт.

35. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE -198-3 шт./блистер, в составе:

- размер 1302, длина 21 мм – 1 шт.
- размер 1602, длина 21 мм– 1 шт.
- размер 1902, длина 21 мм– 1 шт.
- счетчик использования инструмента – 3 шт.

36. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE -199-3 шт./блистер, в составе:

- размер 1302, длина 25 мм – 1 шт.
- размер 1602, длина 25 мм– 1 шт.
- размер 1902, длина 25 мм– 1 шт.
- счетчик использования инструмента – 3 шт.

37. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE-206-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 1902, длина 25 мм – 6 шт.
- счетчик использования инструмента – 6 шт.

38. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE-209-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 1302, длина 21 мм – 6 шт.
- счетчик использования инструмента – 6 шт.

39. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE -210-4 шт./блистер, в составе:

- размер 1302, длина 25 мм – 1 шт.
- размер 1602, длина 25 мм– 1 шт.
- размер 1902, длина 25 мм– 1 шт.
- размер 1503, длина 25 мм– 1 шт.
- счетчик использования инструмента – 4 шт.

40. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE-217-5 шт./ блистер, в составе:

- размер 1503, длина 21 мм – 5 шт.
- счетчик использования инструмента – 5 шт.

41. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE-222-5 шт./ блистер, в составе:

- размер 1002, длина 21 мм – 5 шт.
- счетчик использования инструмента – 5 шт.

42. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE-223-5 шт./ блистер, в составе:

- размер 1002, длина 25 мм – 5 шт.
- счетчик использования инструмента – 5 шт.

- 29

56. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE-269-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 5003, длина 25 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
57. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE-270 -6 шт./ блистер, в составе:
- размер 5003, длина 31 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
58. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE -271-4 шт./блистер, в составе:
-размер 3003, длина 21 мм – 1 шт.
-размер 3503, длина 21 мм– 1 шт.
-размер 4003, длина 21 мм– 1 шт.
-размер 5003, длина 21 мм– 1 шт.
-счетчик использования инструмента – 4 шт.
59. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE -272-4 шт./блистер, в составе:
-размер 3003, длина 25 мм – 1 шт.
-размер 3503, длина 25 мм– 1 шт.
-размер 4003, длина 25 мм– 1 шт.
-размер 5003, длина 25 мм– 1 шт.
-счетчик использования инструмента – 4 шт.
60. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE -273-4 шт./блистер, в составе:
-размер 3003, длина 31 мм – 1 шт.
-размер 3503, длина 31 мм– 1 шт.
-размер 4003, длина 31 мм– 1 шт.
-размер 5003, длина 31 мм– 1 шт.
-счетчик использования инструмента – 4 шт.
61. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-046-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 1302, длина 25 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
62. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-048-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 1502, длина 25 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
63. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-050-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 1602, длина 25 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
64. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-071-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 1504, длина 25 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
65. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-025-6 шт./ блистер, в составе:
- размер 5002, длина 25 мм – 6 шт.
-счетчик использования инструмента – 6 шт.
66. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-091-3 шт./блистер, в составе:
-размер 1504, длина 25 мм – 2 шт.

- размер 2004, длина 25 мм – 1 шт.
- счетчик использования инструмента – 3 шт.
- 67. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-097-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 1503, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 68. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-098-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 1504, длина 21 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 69. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-099-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 1504, длина 31 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 70. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-100-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 2004, длина 21 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 71. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-101-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 2004, длина 31 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 72. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-125-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 1902, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 73. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-126-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 2004, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 74. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-146-6 шт./ блистер, в составе:
 - размер 1902, длина 31 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
- 75. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-155-4 шт./блистер, в составе:
 - размер 1302, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 1602, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 1902, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 1503, длина 25 мм – 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
- 76. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-159-4 шт./блистер, в составе:
 - размер 1302, длина 21 мм – 1 шт.
 - размер 1602, длина 21 мм – 2 шт.
 - размер 1503, длина 21 мм – 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
- 77. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-160-4 шт./блистер, в составе:
 - размер 1302, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 1602, длина 31 мм – 2 шт.
 - размер 1503, длина 31 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 4 шт.

78. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-175-6 шт./блистер, в составе:

-размер 1302, длина 21 мм – 2 шт.

-размер 1602, длина 21 мм – 2 шт.

-размер 1902, длина 21 мм – 2 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

79. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-176-6 шт./блистер, в составе:

-размер 1302, длина 25 мм – 2 шт.

-размер 1602, длина 25 мм – 2 шт.

-размер 1902, длина 25 мм – 2 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

80. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-177 -6 шт./ блистер, в составе:

- размер 1302, длина 21 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

81. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-178-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 1602, длина 21 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

82. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-179-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 1902, длина 21 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

83. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-249-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 1004, длина 25 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

84. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-297-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 1203, длина 21 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

85. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-298-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 1203, длина 25 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

86. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX S-093-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 1502v, длина 21 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

87. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX S-094-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 1502v, длина 25 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

88. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX S-095-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 1502v, длина 31 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

89. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX MINI-009-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 2004, длина 16 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

90. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-114-5 шт./блистер, в составе:

-размер 4502, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 5502, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 6502, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 7502, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 8002, длина 25 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

91. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-115-5 шт./блистер, в составе:

-размер 4502, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 5502, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 6502, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 7502, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 8002, длина 31 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 5 шт.

92. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-309-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 7002, длина 25 мм - 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

93. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX BLUE-305-6 шт./блистер, в составе:

-размер 4502, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 5002, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 5502, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 6002, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 7002, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 8002, длина 25 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

94. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-310-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 8002, длина 31 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

III. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, варианты исполнения:

1. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX ONE-001-3 шт./блистер, в составе:

- размер 2004, длина 21 мм – 3 шт.

-счетчик использования инструмента – 3 шт.

2. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX ONE-019-3 шт./блистер, в составе:

-размер 2004, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 2504, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 3504, длина 25 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 3 шт.

3. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX ONE-020-3 шт./блистер, в составе:

-размер 2006, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 2506, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 3506, длина 25 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 3 шт.

4. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX ONE-021-3 шт./блистер, в составе:
- размер 2004, длина 21 мм – 1 шт.
 - размер 2504, длина 21 мм– 1 шт.
 - размер 3504, длина 21 мм– 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 3 шт.
5. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX ONE-022-3 шт./блистер, в составе:
- размер 2006, длина 21 мм – 1 шт.
 - размер 2506, длина 21 мм– 1 шт.
 - размер 3506, длина 21 мм– 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 3 шт.
6. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX ONE-026-3 шт./блистер, в составе:
- размер 1004, длина 25 мм – 3 шт.
 - счетчик использования инструмента – 3 шт.
7. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX ONE-027-3 шт./блистер, в составе:
- размер 1504, длина 25 мм – 3 шт.
 - счетчик использования инструмента – 3 шт.
8. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX ONE-028-4 шт./блистер, в составе:
- размер 2004, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 2504, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 3504, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 4004, длина 25 мм– 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
9. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX ONE-031-3 шт./блистер, в составе:
- размер 2004, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 2504, длина 31 мм– 1 шт.
 - размер 3504, длина 31 мм– 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 3 шт.
10. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX ONE-034-3 шт./блистер, в составе:
- размер 2006, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 2506, длина 31 мм– 1 шт.
 - размер 3506, длина 31 мм– 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 3 шт.
11. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX ONE-035-6 шт./блистер, в составе:
- размер 2504, длина 21 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
12. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX ONE-037-6 шт./блистер, в составе:
- размер 1504, длина 25 мм -6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
13. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX ONE-038-4 шт./блистер, в составе:
- размер 2006, длина 25 мм – 4 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.

14. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX ONE-039-4 шт./блистер, в составе:

- размер 2504, длина 25 мм – 4 шт.
- счетчик использования инструмента – 4 шт.

15. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX ONE-041-3 шт./блистер, в составе:

- размер 1004, длина 25 мм – 1 шт.
- размер 1504, длина 25 мм– 1 шт.
- размер 2004, длина 25 мм– 1 шт.
- счетчик использования инструмента – 3 шт.

16. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX ONE-042-3 шт./блистер, в составе:

- размер 1004, длина 21 мм – 1 шт.
- размер 1504, длина 21 мм– 1 шт.
- размер 2004, длина 21 мм– 1 шт.
- счетчик использования инструмента – 3 шт.

17. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX ONE-043-3 шт./блистер, в составе:

- размер 1004, длина 31 мм – 1 шт.
- размер 1504, длина 31 мм– 1 шт.
- размер 2004, длина 31 мм– 1 шт.
- счетчик использования инструмента – 3 шт.

18. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX ONE-054-6 шт./блистер, в составе:

- размер 2004, длина 25 мм – 2 шт.
- размер 2504, длина 25 мм– 2 шт.
- размер 3504, длина 25 мм– 2 шт.
- счетчик использования инструмента – 6 шт.

19. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX ONE-055-6 шт./блистер, в составе:

- размер 2006, длина 25 мм – 2 шт.
- размер 2506, длина 25 мм– 2 шт.
- размер 3506, длина 25 мм– 2 шт.
- счетчик использования инструмента – 6 шт.

20. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-001-3 шт./блистер, в составе:

- размер 2004, длина 25 мм – 1 шт.
- размер 2504, длина 25 мм– 1 шт.
- размер 3504, длина 25 мм– 1 шт.
- счетчик использования инструмента – 3 шт.

21. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-006-4 шт./блистер, в составе:

- размер 1604, длина 25 мм – 1 шт.
- размер 2504, длина 25 мм– 1 шт.
- размер 2506, длина 25 мм– 1 шт.
- размер 3504, длина 25 мм– 1 шт.
- счетчик использования инструмента – 4 шт.

22. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-013-4 шт./блистер, в составе:

- размер 1504, длина 25 мм – 1 шт.
- размер 2504, длина 25 мм– 1 шт.
- размер 2506, длина 25 мм– 1 шт.

- размер 3504, длина 25 мм – 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
23. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-014-4 шт./блистер, в составе:
- размер 1504, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 2004, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 2504, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 3504, длина 25 мм – 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
24. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-017-3 шт./блистер, в составе:
- размер 2006, длина 21 мм – 1 шт.
 - размер 2506, длина 21 мм – 1 шт.
 - размер 3506, длина 21 мм – 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 3 шт.
25. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-019-3 шт./блистер, в составе:
- размер 2006, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 2506, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 3506, длина 31 мм – 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 3 шт.
26. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-021-3 шт./блистер, в составе:
- размер 3504, длина 21 мм – 3 шт.
 - счетчик использования инструмента – 3 шт.
27. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-023-3 шт./блистер, в составе:
- размер 2506, длина 21 мм – 3 шт.
 - счетчик использования инструмента – 3 шт.
28. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-025-3 шт./блистер, в составе:
- размер 2006, длина 21 мм – 3 шт.
 - счетчик использования инструмента – 3 шт.
29. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-027-3 шт./блистер, в составе:
- размер 3506, длина 21 мм – 3 шт.
 - счетчик использования инструмента – 3 шт.
30. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-036-4 шт./блистер, в составе:
- размер 1504, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 2504, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 2506, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 3504, длина 25 мм – 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
31. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-037-4 шт./блистер, в составе:
- размер 1504, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 2504, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 2506, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 3504, длина 31 мм – 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
32. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых

- каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-038-4 шт./блистер, в составе:
- размер 2004, длина 31 мм – 4 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
33. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-039-4 шт./блистер, в составе:
- размер 2504, длина 31 мм – 4 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
34. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-040-4 шт./блистер, в составе:
- размер 2006, длина 25 мм – 4 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
35. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-041-4 шт./блистер, в составе:
- размер 3506, длина 25 мм – 4 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
36. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-090-4 шт./блистер, в составе:
- размер 4504, длина 21 мм – 4 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
37. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-091-4 шт./блистер, в составе:
- размер 4504, длина 25 мм – 4 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
38. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-092-4 шт./блистер, в составе:
- размер 5504, длина 21 мм – 4 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
39. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-093-4 шт./блистер, в составе:
- размер 5504, длина 25 мм – 4 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
40. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-136-6 шт./блистер, в составе:
- размер 2004, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 2504, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 3004, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 3504, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 4504, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 5504, длина 25 мм – 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
41. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-141 -4 шт./блистер, в составе:
- размер 3006, длина 25 мм – 4 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
42. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-142-4 шт./блистер, в составе:
- размер 1504, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 2004, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 2504, длина 31 мм – 1 шт.
 - размер 3504, длина 31 мм – 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
43. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых

каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-143-6 шт./блистер, в составе:

- размер 3004, длина 25 мм – 6 шт.

- счетчик использования инструмента – 6 шт.

44. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-001-3 шт./блистер, в составе:

- размер 2004, длина 21 мм – 3 шт.

- счетчик использования инструмента – 3 шт.

45. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-003 -3 шт./блистер, в составе:

- размер 3504, длина 21 мм – 3 шт.

- счетчик использования инструмента – 3 шт.

46. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-004-3 шт./блистер, в составе:

- размер 4004, длина 21 мм – 3 шт.

- счетчик использования инструмента – 3 шт.

47. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-014-3 шт./блистер, в составе:

- размер 2506, длина 21 мм – 3 шт.

- счетчик использования инструмента – 3 шт.

48. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-015-3 шт./блистер, в составе:

- размер 3506, длина 21 мм – 3 шт.

- счетчик использования инструмента – 3 шт.

49. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-019-3 шт./блистер, в составе:

- размер 3506, длина 25 мм – 3 шт.

- счетчик использования инструмента – 3 шт.

50. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-025-4 шт./блистер, в составе:

- размер 2004, длина 25 мм – 1 шт.

- размер 2504, длина 25 мм– 1 шт.

- размер 3504, длина 25 мм– 1 шт.

- размер 4004, длина 25 мм– 1 шт.

- счетчик использования инструмента – 4 шт.

51. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-026-4 шт./блистер, в составе:

- размер 2006, длина 25 мм – 1 шт.

- размер 2506, длина 25 мм– 1 шт.

- размер 3506, длина 25 мм– 1 шт.

- размер 4006, длина 25 мм– 1 шт.

- счетчик использования инструмента – 4 шт.

52. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-027-4 шт./блистер, в составе:

- размер 2004, длина 21 мм – 1 шт.

- размер 2504, длина 21 мм– 1 шт.

- размер 3504, длина 21 мм– 1 шт.

- размер 4004, длина 21 мм– 1 шт.

- счетчик использования инструмента – 4 шт.

53. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-045-3 шт./блистер, в составе:

- размер 2004, длина 25 мм – 1 шт.

- размер 2504, длина 25 мм– 1 шт.

-размер 3504, длина 25 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 3 шт.

54. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-046-4 шт./блистер, в составе:

-размер 2006, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 2506, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 3506, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 4006, длина 21 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 4 шт.

55. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-048-4 шт./блистер, в составе:

-размер 2004, длина 28 мм – 1 шт.

-размер 2504, длина 28 мм – 1 шт.

-размер 3504, длина 28 мм – 1 шт.

-размер 4004, длина 28 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 4 шт.

56. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-049-4 шт./блистер, в составе:

-размер 2004, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 2504, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 3504, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 4004, длина 31 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 4 шт.

57. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-053-4 шт./блистер, в составе:

-размер 2006, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 2506, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 3506, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 4006, длина 31 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 4 шт.

58. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-056-3 шт./блистер, в составе:

- размер 2506, длина 31 мм -3 шт.

-счетчик использования инструмента – 3 шт.

59. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-061-6 шт./блистер, в составе:

- размер 2504, длина 21 мм -6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

60. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-062-5 шт./блистер, в составе:

-размер 2004, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 2504, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 3504, длина 25 мм – 2 шт.

-размер 4004, длина 25 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 5 шт.

61. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-063-4 шт./блистер, в составе:

-размер 2004, длина 21 мм – 2 шт.

-размер 2506, длина 21 мм – 2 шт.

-счетчик использования инструмента – 4 шт.

62. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-064-4 шт./блистер, в составе:

- размер 2004, длина 25 мм – 2 шт.
 - размер 2506, длина 25 мм– 2 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
63. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип H-файл, E-FLEX REC-068-4 шт./блистер, в составе:
- размер 2004, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 2504, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 3504, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 4004, длина 25 мм– 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
64. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип H-файл, E-FLEX REC-069-4 шт./блистер, в составе:
- размер 2006, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 2506, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 3506, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 4006, длина 25 мм– 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
65. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип H-файл, E-FLEX REC-070-4 шт./блистер, в составе:
- размер 2004, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 2504, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 3504, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 4004, длина 25 мм– 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
66. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип H-файл, E-FLEX REC-071-4 шт./блистер, в составе:
- размер 2006, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 2506, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 3506, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 4006, длина 25 мм– 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 4 шт.
67. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип H-файл, E-FLEX REC-080-3 шт./блистер, в составе:
- размер 2006, длина 25 мм – 1 шт.
 - размер 2506, длина 25 мм– 1 шт.
 - размер 3506, длина 25 мм– 1 шт.
 - счетчик использования инструмента – 3 шт.
68. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип H-файл, E-FLEX REC-081-6 шт./блистер, в составе:
- размер 2004, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
69. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип H-файл, E-FLEX REC-082-6 шт./блистер, в составе:
- размер 2006, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
70. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип H-файл, E-FLEX REC-083-6 шт./блистер, в составе:
- размер 2504, длина 25 мм – 6 шт.
 - счетчик использования инструмента – 6 шт.
71. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип H-файл, E-FLEX REC-084-6 шт./блистер, в составе:
- размер 2506, длина 25 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

85. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-098-6 шт./блистер, в составе:

- размер 2505, длина 31 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

86. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-099-6 шт./блистер, в составе:

- размер 3505, длина 21 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

87. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-100 -6 шт./блистер, в составе:

- размер 3505, длина 25 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

88. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-101-6 шт./блистер, в составе:

- размер 3505, длина 31 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

89. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-102 -6 шт./блистер, в составе:

- размер 4505, длина 21 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

90. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-103-6 шт./блистер, в составе:

- размер 4505, длина 25 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

91. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-104-6 шт./блистер, в составе:

- размер 4505, длина 31 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

92. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-105-4 шт./блистер, в составе:

-размер 2005, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 2505, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 3505, длина 21 мм – 1 шт.

-размер 4505, длина 21 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 4 шт.

93. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-106-4 шт./блистер, в составе:

-размер 2005, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 2505, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 3505, длина 25 мм – 1 шт.

-размер 4505, длина 25 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 4 шт.

94. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX REC-107-4 шт./блистер, в составе:

-размер 2005, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 2505, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 3505, длина 31 мм – 1 шт.

-размер 4505, длина 31 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 4 шт.

95. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX ONE-057-6 шт./блистер, в составе:

- размер 4504, длина 25 мм – 1 шт.
- размер 5004, длина 25 мм – 1 шт.
- размер 5504, длина 25 мм – 1 шт.
- размер 6004, длина 25 мм – 1 шт.
- размер 7004, длина 25 мм – 1 шт.
- размер 8004, длина 25 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

96. Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип Н-файл, E-FLEX EDGE-156-6 шт./блистер, в составе:

- размер 4504, длина 25 мм – 1 шт.
- размер 5004, длина 25 мм – 1 шт.
- размер 5504, длина 25 мм – 1 шт.
- размер 6004, длина 25 мм – 1 шт.
- размер 7004, длина 25 мм – 1 шт.
- размер 8004, длина 25 мм – 1 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

Эксплуатационная документация:

1. Инструкция по применению.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Для очистки и расширения корневого канала, сглаживания его стенок за счет резки или шлифовки при эндодонтической терапии, путем присоединения к вращающемуся или возвратно-поступательному приводному эндодонтическому устройству.

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стоматология.

5. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Квалифицированный медицинский персонал.

6. ПОКАЗАНИЯ

- кариес;
- пульпит;
- отек десны;
- любая дентальная боль.

7. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- вертикальный перелом зубного корня;
- инструмент содержит никель-титан, силикон, не применять в лечении при известных аллергических реакциях у пациента.
- не применять в случае резкого искривления апикальной части корневого канала зуба

8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1) Инструмент необходимо очищать, дезинфицировать и стерилизовать перед первым применением, а также после каждого последующего применения.

2) Инструменты, на которых появилась коррозия, возникла деформация, раскрутилась резьба, повреждены режущие поверхности, затупились лезвия или потеряли цвет, подлежат утилизации.

3) Инструмент можно использовать не более 8 раз, это высчитывается по счётчику использования.

- 4) Режущие лезвия эндодонтических инструментов острые; соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы.
- 5) Для оптимальной работы рекомендуется использовать эндомотор. При использовании инструмента придерживайтесь рекомендуемых настроек мотора (скорости вращения и крутящего момента).
- 6) Инструмент нельзя погружать в раствор гипохлорита натрия.
- 7) Всегда применяйте минимальное давление в апикальной части. Не вводите инструмент в канал силой.
- 8) Необходима частая промывка; проводите рекапитуляцию и промывайте канал на протяжении всей процедуры, по меньшей мере, каждый раз, когда используется какой-либо инструмент.
- 9) Инструмент содержит никель-титановый сплав и не должен использоваться на людях с подтверждённой аллергической чувствительностью к этому материалу.
- 10) При работе с искривлёнными или неправильно сформированными корневыми каналами инструмент следует использовать с осторожностью.

9. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Для эксплуатации эндодонтического инструмента необходимо соединить эндомотор с хвостовиком; мотор приводит инструмент в действие с определённой скоростью вращения и крутящим моментом. Режущие лезвия рабочего элемента инструмента при вращении выполняют функцию разрезания и выравнивания.

10. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Не выявлены.

11. КЛАССИФИКАЦИЯ

Класс IIa.

12. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КОНТАКТА С ОРГАНИЗМОМ

Кратковременный контакт (менее 24 часа) с твёрдыми и мягкими тканями зуба, слизистой оболочкой полости рта.

13. ОПИСАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эндодонтические инструменты состоят из рабочей детали, хвостовика и ограничителя, а рабочая часть включает рабочий элемент с режущими лезвиями. Общий вид представлен на рисунке 1.

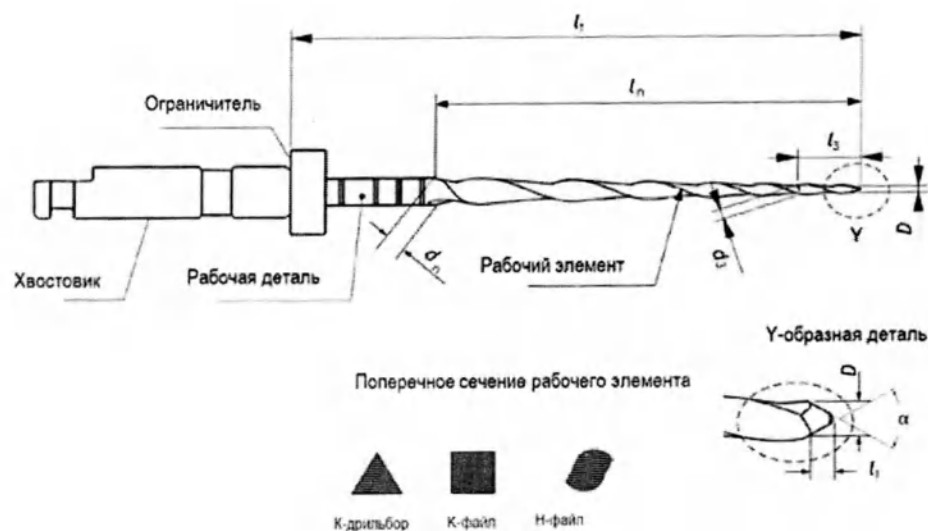


Рисунок 1

α — Конусность

D — Начальный диаметр

d_3 — диаметр на расстоянии 3 мм от конца

d_n — Диаметр на расстоянии l_n от конца


l_1 — Длина насадки

l_3 — Длина 3 мм от конца

l_n — Длина режущей части, измеренная от конца

l_t — Длина оперативной части (рабочего элемента).

Счетчик использования инструмента представляет собой «ромашку», от которой после работы отрываются лепестки. Счетчик предназначен для контроля использования инструмента. Максимальное количество применений инструмента равно 8.

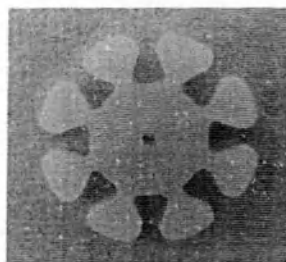

Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-드릴бор

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX-007	1708	17	08 ($8 \pm 0,5$)	0,17	30	19	12	$0,41 \pm 0,03$	0.40	желтый
E-FLEX-021	3504	35	04 ($4 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,47 \pm 0,99$	0.42	зеленый
E-FLEX-030	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,43 \pm 0,03$	0.43	красный
E-FLEX-078	1506	15	06 ($6 \pm 0,5$)	0,15	32	21	16	$0,33 \pm 0,03$	0.41	белый
	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	32	21	16	$0,38 \pm 0,03$	0.40	желтый
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	32	21	16	$0,43 \pm 0,03$	0.42	красный
	3006	30	06 ($6 \pm 0,5$)	0,30	32	21	16	$0,48 \pm 0,03$	0.44	синий
	3506	35	06 ($6 \pm 0,5$)	0,35	32	21	16	$0,53 \pm 0,03$	0.44	зеленый
	4006	40	06 ($6 \pm 0,5$)	0,40	32	21	16	$0,58 \pm 0,03$	0.46	черный
E-FLEX-079	1506	15	06 ($6 \pm 0,5$)	0,15	36	25	16	$0,33 \pm 0,03$	0.42	белый
	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,38 \pm 0,03$	0.41	желтый
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,43 \pm 0,03$	0.43	красный
	3006	30	06 ($6 \pm 0,5$)	0,30	36	25	16	$0,48 \pm 0,03$	0.45	синий
	3506	35	06 ($6 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,53 \pm 0,03$	0.45	зеленый
	4006	40	06 ($6 \pm 0,5$)	0,40	36	25	16	$0,58 \pm 0,03$	0.47	черный
E-FLEX-080	1506	15	06 ($6 \pm 0,5$)	0,15	42	31	16	$0,33 \pm 0,03$	0.43	белый
	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	42	31	16	$0,38 \pm 0,03$	0.42	желтый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм (±0,5 мм)	Длина оперативной части, мм (±0,5 мм) L ₁	Длина режущей части, мм (±0,5 мм) l _n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d ₃	Масса, г (±0,05 г)	Обозначение цвета
	2506	25	06 (6±0,5)	0,25	42	31	16	0,43±0,03	0.42	красный
	3006	30	06 (6±0,5)	0,30	42	31	16	0,48±0,03	0.46	синий
	3506	35	06 (6±0,5)	0,35	42	31	16	0,53±0,03	0.46	зеленый
	4006	40	06 (6±0,5)	0,40	42	31	16	0,58±0,03	0.48	черный
E-FLEX-081	4004	40	04 (4±0,5)	0,40	32	21	16	0,52±0,03	0.43	черный
E-FLEX-082	4004	40	04 (4±0,5)	0,40	36	25	16	0,52±0,03	0.44	черный
E-FLEX-083	4504	45	04 (4±0,5)	0,45	32	21	16	0,57±0,03	0.43	белый
E-FLEX-084	4504	45	04 (4±0,5)	0,45	36	25	16	0,57±0,03	0.44	белый
E-FLEX-093	2504	25	04 (4±0,5)	0,25	36	25	16	0,37±0,03	0.43	красный
E-FLEX-094	3004	30	04 (4±0,5)	0,30	36	25	16	0,42±0,03	0.43	синий
E-FLEX BLUE-089	2504	25	04 (4±0,5)	0,25	36	25	16	0,37±0,03	0.43	красный
E-FLEX BLUE-007	1708	17	08 (8±0,5)	0,17	30	19	12	0,41±0,03	0.40	желтый
	2006	20	06 (6±0,5)	0,20	32	21	16	0,38±0,03	0.40	желтый
	2506	25	06 (6±0,5)	0,25	32	21	16	0,43±0,03	0.42	красный
	3006	30	06 (6±0,5)	0,30	32	21	16	0,48±0,03	0.44	синий

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_t	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX BLUE-008	1708	17	08 ($8 \pm 0,5$)	0,17	30	19	12	$0,41 \pm 0,03$	0.40	желтый
	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,38 \pm 0,03$	0.41	желтый
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,43 \pm 0,03$	0.43	красный
	3006	30	06 ($6 \pm 0,5$)	0,30	36	25	16	$0,48 \pm 0,03$	0.45	синий
E-FLEX BLUE-009	1708	17	08 ($8 \pm 0,5$)	0,17	30	19	12	$0,41 \pm 0,03$	0.40	желтый
	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	42	31	16	$0,38 \pm 0,03$	0.42	желтый
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	42	31	16	$0,43 \pm 0,03$	0.42	красный
	3006	30	06 ($6 \pm 0,5$)	0,30	42	31	16	$0,48 \pm 0,03$	0.46	синий
E-FLEX BLUE-011	1708	17	08 ($8 \pm 0,5$)	0,17	30	19	12	$0,41 \pm 0,03$	0.40	желтый
	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,38 \pm 0,03$	0.41	желтый
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,43 \pm 0,03$	0.43	красный
	3006	30	06 ($6 \pm 0,5$)	0,30	36	25	16	$0,48 \pm 0,03$	0.45	синий
	3506	35	06 ($6 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,53 \pm 0,03$	0.45	зеленый
E-FLEX BLUE-021	4004	40	04 ($4 \pm 0,5$)	0,40	42	31	16	$0,52 \pm 0,03$	0.45	черный
E-FLEX BLUE-022	1506	15	06 ($6 \pm 0,5$)	0,15	32	21	16	$0,33 \pm 0,03$	0.41	белый
E-FLEX BLUE-025	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	32	21	16	$0,43 \pm 0,03$	0.42	желтый
E-FLEX BLUE-028	4006	40	06 ($6 \pm 0,5$)	0,40	32	21	16	$0,58 \pm 0,03$	0.46	черный

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX BLUE-030	4006	40	06 ($6\pm 0,5$)	0,40	42	31	16	$0,58\pm 0,03$	0,48	черный
E-FLEX BLUE-031	2504	25	04 ($4\pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,37\pm 0,03$	0,43	красный
	2506	25	06 ($6\pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,43\pm 0,03$	0,43	красный
E-FLEX BLUE-039	1506	15	06 ($6\pm 0,5$)	0,15	36	25	16	$0,33\pm 0,03$	0,42	белый
	2006	20	06 ($6\pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,38\pm 0,03$	0,41	желтый
	2506	25	06 ($6\pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,43\pm 0,03$	0,43	красный
	3006	30	06 ($6\pm 0,5$)	0,30	36	25	16	$0,48\pm 0,03$	0,45	синий
	3506	25	06 ($6\pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,53\pm 0,03$	0,45	зеленый
	4006	40	06 ($6\pm 0,5$)	0,40	36	25	16	$0,58\pm 0,03$	0,47	черный
E-FLEX BLUE-047	3004	30	04 ($4\pm 0,5$)	0,30	36	25	16	$0,42\pm 0,03$	0,43	синий
E-FLEX BLUE-048	3504	35	04 ($4\pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,47\pm 0,03$	0,42	зеленый
E-FLEX BLUE-049	4004	40	04 ($4\pm 0,5$)	0,40	36	25	16	$0,52\pm 0,03$	0,44	черный
E-FLEX BLUE-050	1506	15	06 ($6\pm 0,5$)	0,15	36	25	16	$0,33\pm 0,03$	0,42	белый
E-FLEX BLUE-051	2006	20	06 ($6\pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,38\pm 0,03$	0,41	желтый
E-FLEX BLUE-052	2506	25	06 ($6\pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,43\pm 0,03$	0,43	красный

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX BLUE-053	3006	30	06 ($6 \pm 0,5$)	0,30	36	25	16	$0,48 \pm 0,03$	0.45	синий
E-FLEX BLUE-054	3506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,53 \pm 0,03$	0.45	зеленый
E-FLEX BLUE-055	4006	40	06 ($6 \pm 0,5$)	0,40	36	25	16	$0,58 \pm 0,03$	0.47	черный
E-FLEX BLUE-060	2504	25	04 ($4 \pm 0,5$)	0,25	42	31	16	$0,37 \pm 0,03$	0.44	красный
E-FLEX BLUE-061	1506	15	06 ($6 \pm 0,5$)	0,15	42	31	16	$0,33 \pm 0,03$	0.43	белый
E-FLEX BLUE-062	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	42	31	16	$0,38 \pm 0,03$	0.42	желтый
E-FLEX BLUE-066	1506	15	06 ($6 \pm 0,5$)	0,15	32	21	16	$0,33 \pm 0,03$	0.41	белый
	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	32	21	16	$0,38 \pm 0,03$	0.40	желтый
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	32	21	16	$0,43 \pm 0,03$	0.42	красный
	3006	30	06 ($6 \pm 0,5$)	0,30	32	21	16	$0,48 \pm 0,03$	0.44	синий
	3506	35	06 ($6 \pm 0,5$)	0,35	32	21	16	$0,53 \pm 0,03$	0.44	зеленый
	4006	40	06 ($6 \pm 0,5$)	0,40	32	21	16	$0,58 \pm 0,03$	0.46	черный
E-FLEX BLUE-067	4004	40	04 ($4 \pm 0,5$)	0,40	32	21	16	$0,52 \pm 0,03$	0.43	черный
E-FLEX BLUE-068	1708	17	08 ($8 \pm 0,5$)	0,17	30	19	12	$0,41 \pm 0,03$	0.40	желтый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм (±0,5 мм)	Длина оперативной части, мм (±0,5 мм) L _t	Длина режущей части, мм (±0,5 мм) l _n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d ₃	Масса, г (±0,05 г)	Обозначение цвета
E-FLEX BLUE-070	2504	25	04 (4±0,5)	0,25	32	21	16	0,37±0,03	0.42	красный
E-FLEX BLUE-071	3004	30	04 (4±0,5)	0,30	32	21	16	0,42±0,03	0.42	синий
E-FLEX BLUE-082	1708	17	08 (8±0,5)	0,17	30	19	12	0,41±0,03	0.40	желтый
	1506	15	06 (6±0,5)	0,15	36	25	16	0,33±0,03	0.42	белый
	2006	20	06 (6±0,5)	0,20	36	25	16	0,38±0,03	0.41	желтый
	2506	25	06 (6±0,5)	0,25	36	25	16	0,43±0,03	0.43	красный
	3006	30	06 (6±0,5)	0,30	36	25	16	0,48±0,03	0.45	синий
	3506	35	06 (6±0,5)	0,35	36	25	16	0,53±0,03	0.45	зеленый
E-FLEX BLUE-086	1708	17	08 (8±0,5)	0,17	30	19	12	0,41±0,03	0.40	желтый
	1506	15	06 (6±0,5)	0,15	32	21	16	0,33±0,03	0.41	белый
	2006	20	06 (6±0,5)	0,20	32	21	16	0,38±0,03	0.40	желтый
	2506	25	06 (6±0,5)	0,25	32	21	16	0,43±0,03	0.42	красный
	3006	30	06 (6±0,5)	0,30	32	21	16	0,48±0,03	0.44	синий
	3506	35	06 (6±0,5)	0,35	32	21	16	0,53±0,03	0.44	зеленый
E-FLEX BLUE-098	2006	20	06 (6±0,5)	0,20	32	21	16	0,38±0,03	0.40	желтый
E-FLEX BLUE-099	3004	30	04 (4±0,5)	0,30	42	31	16	0,42±0,03	0.44	синий
E-FLEX BLUE-100	3504	35	04 (4±0,5)	0,35	42	31	16	0,47±0,03	0.43	зеленый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_t	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX BLUE-112	4504	45	04 ($4 \pm 0,5$)	0,45	36	25	16	$0,57 \pm 0,03$	0.44	белый
	5004	50	04 ($4 \pm 0,5$)	0,50	36	25	16	$0,62 \pm 0,03$	0.45	желтый
	5504	55	04 ($4 \pm 0,5$)	0,55	36	25	16	$0,67 \pm 0,03$	0.46	красный
	6004	60	04 ($4 \pm 0,5$)	0,60	36	25	16	$0,72 \pm 0,03$	0.47	синий
E-FLEX BLUE-113	4504	45	04 ($4 \pm 0,5$)	0,45	42	31	16	$0,57 \pm 0,03$	0.45	белый
	5004	50	04 ($4 \pm 0,5$)	0,50	42	31	16	$0,62 \pm 0,03$	0.46	желтый
	5504	55	04 ($4 \pm 0,5$)	0,55	42	31	16	$0,67 \pm 0,03$	0.47	красный
	6004	60	04 ($4 \pm 0,5$)	0,60	42	31	16	$0,72 \pm 0,03$	0.48	синий
E-FLEX BLUE-131	1506	15	06 ($6 \pm 0,5$)	0,15	42	31	16	$0,33 \pm 0,03$	0.43	белый
	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	42	31	16	$0,38 \pm 0,03$	0.42	желтый
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	42	31	16	$0,43 \pm 0,03$	0.42	красный
	3006	30	06 ($6 \pm 0,5$)	0,30	42	31	16	$0,48 \pm 0,03$	0.46	синий
	3506	35	06 ($6 \pm 0,5$)	0,35	42	31	16	$0,53 \pm 0,03$	0.46	зеленый
	4006	40	06 ($6 \pm 0,5$)	0,40	42	31	16	$0,58 \pm 0,03$	0.48	черный
E-FLEX BLUE-132	1506	15	06 ($6 \pm 0,5$)	0,15	32	21	16	$0,33 \pm 0,03$	0.41	белый
	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	32	21	16	$0,38 \pm 0,03$	0.40	желтый
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	32	21	16	$0,43 \pm 0,03$	0.42	красный
	3006	30	06 ($6 \pm 0,5$)	0,30	32	21	16	$0,48 \pm 0,03$	0.44	синий
	3506	35	06 ($6 \pm 0,5$)	0,35	32	21	16	$0,53 \pm 0,03$	0.44	зеленый
	4006	40	06 ($6 \pm 0,5$)	0,40	32	21	16	$0,58 \pm 0,03$	0.46	черный

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_t	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX BLUE-139	4504	45	04 ($4\pm 0,5$)	0,45	36	25	16	$0,57\pm 0,03$	0.44	белый
E-FLEX BLUE-140	4504	45	04 ($4\pm 0,5$)	0,45	32	21	16	$0,57\pm 0,03$	0.43	белый
E-FLEX BLUE-141	4504	45	04 ($4\pm 0,5$)	0,45	42	31	16	$0,57\pm 0,03$	0.45	белый
E-FLEX BLUE-142	5004	50	04 ($4\pm 0,5$)	0,50	36	25	16	$0,62\pm 0,03$	0.45	желтый
E-FLEX BLUE-143	5004	50	04 ($4\pm 0,5$)	0,50	32	21	16	$0,62\pm 0,03$	0.44	желтый
E-FLEX BLUE-144	5004	50	04 ($4\pm 0,5$)	0,50	42	31	16	$0,62\pm 0,03$	0.46	желтый
E-FLEX BLUE-145	5504	55	04 ($4\pm 0,5$)	0,55	36	25	16	$0,67\pm 0,03$	0.46	красный
E-FLEX BLUE-146	5504	55	04 ($4\pm 0,5$)	0,55	32	21	16	$0,67\pm 0,03$	0.45	красный
E-FLEX BLUE-147	5504	55	04 ($4\pm 0,5$)	0,55	42	31	16	$0,67\pm 0,03$	0.47	красный
E-FLEX BLUE-148	6004	60	04 ($4\pm 0,5$)	0,60	36	25	16	$0,72\pm 0,03$	0.47	синий
E-FLEX BLUE-149	6004	60	04 ($4\pm 0,5$)	0,60	32	21	16	$0,72\pm 0,03$	0.46	синий
E-FLEX BLUE-150	6004	60	04 ($4\pm 0,5$)	0,60	42	31	16	$0,72\pm 0,03$	0.48	синий

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX BLUE-160	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	42	31	16	$0,43 \pm 0,03$	0.42	красный
E-FLEX BLUE-161	3006	30	06 ($6 \pm 0,5$)	0,30	32	21	16	$0,48 \pm 0,03$	0.44	синий
E-FLEX BLUE-162	3006	30	06 ($6 \pm 0,5$)	0,30	42	31	16	$0,48 \pm 0,03$	0.46	синий
E-FLEX BLUE-163	3506	35	06 ($6 \pm 0,5$)	0,35	32	21	16	$0,53 \pm 0,03$	0.44	зеленый
E-FLEX BLUE-164	3506	35	06 ($6 \pm 0,5$)	0,35	42	31	16	$0,53 \pm 0,03$	0.46	зеленый
E-FLEX BLUE-221	2504	25	04 ($4 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,37 \pm 0,03$	0.43	красный
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,43 \pm 0,03$	0.43	красный
E-FLEX BLUE-235	1708	17	08 ($8 \pm 0,5$)	0,17	30	19	12	$0,41 \pm 0,03$	0.40	желтый
	1506	15	06 ($6 \pm 0,5$)	0,15	32	21	16	$0,33 \pm 0,03$	0.41	белый
	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	32	21	16	$0,38 \pm 0,03$	0.40	желтый
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	32	21	16	$0,43 \pm 0,03$	0.42	красный
	3006	30	07 ($7 \pm 0,5$)	0,30	32	21	16	$0,48 \pm 0,03$	0.44	синий
E-FLEX BLUE-236	1708	17	08 ($8 \pm 0,5$)	0,17	30	19	12	$0,41 \pm 0,03$	0.40	желтый
	1506	15	06 ($6 \pm 0,5$)	0,15	36	25	16	$0,33 \pm 0,03$	0.42	белый
	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,38 \pm 0,03$	0.41	желтый
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,43 \pm 0,03$	0.43	красный

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
	3006	30	07 ($7 \pm 0,5$)	0,30	36	25	16	$0,48 \pm 0,03$	0.45	синий
E-FLEX BLUE-243	2504	25	04 ($4 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,37 \pm 0,03$	0.43	красный
	3004	30	04 ($4 \pm 0,5$)	0,30	36	25	16	$0,42 \pm 0,03$	0.43	синий
	3504	35	04 ($4 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,47 \pm 0,03$	0.42	зеленый
E-FLEX BLUE-244	2504	25	04 ($4 \pm 0,5$)	0,25	42	31	16	$0,37 \pm 0,03$	0.44	красный
	3004	30	04 ($4 \pm 0,5$)	0,30	42	31	16	$0,42 \pm 0,03$	0.44	синий
	3504	35	04 ($4 \pm 0,5$)	0,35	42	31	16	$0,47 \pm 0,03$	0.43	зеленый
E-FLEX BLUE-245	2504	25	04 ($4 \pm 0,5$)	0,25	32	21	16	$0,37 \pm 0,03$	0.42	красный
	3004	30	04 ($4 \pm 0,5$)	0,30	32	21	16	$0,42 \pm 0,03$	0.42	синий
	3504	35	04 ($4 \pm 0,5$)	0,35	32	21	16	$0,47 \pm 0,03$	0.41	зеленый
E-FLEX BLUE-249	3504	35	04 ($4 \pm 0,5$)	0,35	32	21	16	$0,47 \pm 0,03$	0.41	зеленый
E-FLEX GOLD-009	3004	30	04 ($4 \pm 0,5$)	0,30	36	25	16	$0,42 \pm 0,03$	0.43	синий
E-FLEX GOLD-011	1506	15	06 ($6 \pm 0,5$)	0,15	36	25	16	$0,33 \pm 0,03$	0.42	белый
E-FLEX GOLD-016	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,38 \pm 0,03$	0.41	желтый
E-FLEX GOLD-040	4004	40	04 ($4 \pm 0,5$)	0,40	36	25	16	$0,52 \pm 0,03$	0.44	черный

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_t	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX GOLD-041	3506	35	06 ($6 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,53 \pm 0,03$	0.45	зеленый
E-FLEX GOLD-042	4006	40	06 ($6 \pm 0,5$)	0,40	36	25	16	$0,58 \pm 0,03$	0.47	черный
E-FLEX GOLD-049	1708	17	08 ($8 \pm 0,5$)	0,17	30	19	12	$0,41 \pm 0,03$	0.40	желтый
	1506	15	06 ($6 \pm 0,5$)	0,15	36	25	16	$0,33 \pm 0,03$	0.42	белый
	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,38 \pm 0,03$	0.41	желтый
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,43 \pm 0,03$	0.43	красный
	3006	30	06 ($6 \pm 0,5$)	0,30	36	25	16	$0,48 \pm 0,03$	0.45	синий
	3506	35	06 ($6 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,53 \pm 0,03$	0.45	зеленый
E-FLEX GOLD-083	3504	35	04 ($4 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,47 \pm 0,03$	0.42	зеленый
E-FLEX GOLD-096	3006	30	06 ($6 \pm 0,5$)	0,30	36	25	16	$0,48 \pm 0,03$	0.45	синий
E-FLEX GOLD-107	3004	30	04 ($4 \pm 0,5$)	0,30	42	31	16	$0,42 \pm 0,03$	0.44	синий
E-FLEX GOLD-109	3504	35	04 ($4 \pm 0,5$)	0,35	42	31	16	$0,47 \pm 0,03$	0.43	синий
E-FLEX GOLD-110	4004	40	04 ($4 \pm 0,5$)	0,40	32	21	16	$0,52 \pm 0,03$	0.43	черный
E-FLEX GOLD-111	4004	40	04 ($4 \pm 0,5$)	0,40	42	31	16	$0,52 \pm 0,03$	0.45	черный

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX GOLD-112	1506	15	06 ($6\pm 0,5$)	0,15	32	21	16	$0,33\pm 0,03$	0.41	белый
E-FLEX GOLD-113	1506	15	06 ($6\pm 0,5$)	0,15	42	31	16	$0,33\pm 0,03$	0.43	белый
E-FLEX GOLD-119	1708	17	08 ($8\pm 0,5$)	0,17	30	19	12	$0,41\pm 0,03$	0.40	желтый
E-FLEX GOLD-127	2504	25	04 ($4\pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,37\pm 0,03$	0.43	красный
E-FLEX GOLD-128	2506	25	06 ($6\pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,43\pm 0,03$	0.43	красный
E-FLEX GOLD-148	2504	25	04 ($4\pm 0,5$)	0,25	42	31	16	$0,37\pm 0,03$	0.44	красный
E-FLEX GOLD-156	1505	15	05 ($5\pm 0,5$)	0,15	32	21	16	$0,30\pm 0,03$	0.44	белый
	2006	20	06 ($6\pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,38\pm 0,03$	0.41	желтый
	2506	25	06 ($6\pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,43\pm 0,03$	0.43	красный
E-FLEX GOLD-161	1708	17	08 ($8\pm 0,5$)	0,17	30	19	12	$0,41\pm 0,03$	0.40	желтый
	1506	15	06 ($6\pm 0,5$)	0,15	32	21	16	$0,33\pm 0,03$	0.41	белый
	2006	20	06 ($6\pm 0,5$)	0,20	32	21	16	$0,38\pm 0,03$	0.40	желтый
	2506	25	06 ($6\pm 0,5$)	0,25	32	21	16	$0,43\pm 0,03$	0.42	красный
	3006	30	06 ($6\pm 0,5$)	0,30	32	21	16	$0,48\pm 0,03$	0.44	синий
	3506	35	06 ($6\pm 0,5$)	0,35	32	21	16	$0,53\pm 0,03$	0.44	зеленый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм (±0,5 мм)	Длина оперативной части, мм (±0,5 мм) L _t	Длина режущей части, мм (±0,5 мм) l _n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d ₃	Масса, г (±0,05 г)	Обозначение цвета
E-FLEX GOLD-162	1708	17	08 (8±0,5)	0,17	30	19	12	0,41±0,03	0.40	желтый
	1506	15	06 (6±0,5)	0,15	42	31	16	0,33±0,03	0.43	белый
	2006	20	06 (6±0,5)	0,20	42	31	16	0,38±0,03	0.42	желтый
	2506	25	06 (6±0,5)	0,25	42	31	16	0,43±0,03	0.42	красный
	3006	30	06 (6±0,5)	0,30	42	31	16	0,48±0,03	0.46	синий
	3506	35	06 (6±0,5)	0,35	42	31	16	0,53±0,03	0.46	зеленый
E-FLEX GOLD-169	2504	25	04 (4±0,5)	0,25	32	21	16	0,37±0,03	0.42	красный
E-FLEX GOLD-170	2506	25	06 (6±0,5)	0,25	32	21	16	0,43±0,03	0.42	красный
E-FLEX GOLD-171	2506	25	06 (6±0,5)	0,25	42	31	16	0,43±0,03	0.42	красный
E-FLEX GOLD-172	1506	15	06 (6±0,5)	0,15	32	21	16	0,33±0,03	0.41	белый
	2006	20	06 (6±0,5)	0,20	32	21	16	0,38±0,03	0.40	желтый
	2506	25	06 (6±0,5)	0,25	32	21	16	0,43±0,03	0.42	красный
	3006	30	06 (6±0,5)	0,30	32	21	16	0,48±0,03	0.44	синий
	3506	35	06 (6±0,5)	0,35	32	21	16	0,53±0,03	0.44	зеленый
	4006	40	06 (6±0,5)	0,40	32	21	16	0,58±0,03	0.46	черный
E-FLEX GOLD-173	1506	15	06 (6±0,5)	0,15	36	25	16	0,33±0,03	0.42	белый
	2006	20	06 (6±0,5)	0,20	36	25	16	0,38±0,03	0.41	желтый
	2506	25	06 (6±0,5)	0,25	36	25	16	0,43±0,03	0.43	красный

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм (±0,5 мм)	Длина оперативной части, мм (±0,5 мм) L ₁	Длина режущей части, мм (±0,5 мм) l _n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d ₃	Масса, г (±0,05 г)	Обозначение цвета
	3006	30	06 (6±0,5)	0,30	36	25	16	0,48±0,03	0,45	синий
	3506	35	06 (6±0,5)	0,35	36	25	16	0,53±0,03	0,45	зеленый
	4006	40	06 (6±0,5)	0,40	36	25	16	0,58±0,03	0,47	черный
E-FLEX GOLD-174	1506	15	06 (6±0,5)	0,15	42	31	16	0,33±0,03	0,43	белый
	2006	20	06 (6±0,5)	0,20	42	31	16	0,38±0,03	0,42	желтый
	2506	25	06 (6±0,5)	0,25	42	31	16	0,43±0,03	0,42	красный
	3006	30	06 (6±0,5)	0,30	42	31	16	0,48±0,03	0,46	синий
	3506	35	06 (6±0,5)	0,35	42	31	16	0,53±0,03	0,46	зеленый
	4006	40	06 (6±0,5)	0,40	42	31	16	0,58±0,03	0,48	черный
E-FLEX GOLD-180	4504	45	04 (4±0,5)	0,45	32	21	16	0,57±0,03	0,43	белый
E-FLEX GOLD-181	4504	45	04 (4±0,5)	0,45	36	25	16	0,57±0,03	0,44	белый
E-FLEX GOLD-182	5004	50	04 (4±0,5)	0,50	32	21	16	0,62±0,03	0,44	желтый
E-FLEX GOLD-183	5004	50	04 (4±0,5)	0,50	36	25	16	0,62±0,03	0,45	желтый
E-FLEX GOLD-184	5504	55	04 (4±0,5)	0,55	32	21	16	0,67±0,03	0,45	красный
E-FLEX GOLD-185	5504	55	04 (4±0,5)	0,55	36	25	16	0,67±0,03	0,46	красный
E-FLEX GOLD-232	4006	40	06 (6±0,5)	0,40	32	21	16	0,58±0,03	0,46	черный

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм (±0,5 мм)	Длина оперативной части, мм (±0,5 мм) L ₁	Длина режущей части, мм (±0,5 мм) l _n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d ₃	Масса, г (±0,05 г)	Обозначение цвета
E-FLEX GOLD-233	1712	17	12 (12±0,5)	0,17	30	19	12	0,53±0,03	0.40	желтый
E-FLEX GOLD-236	2004	20	04 (4±0,5)	0,20	32	21	16	0,32±0,03	0.42	желтый
E-FLEX GOLD-237	2004	20	04 (4±0,5)	0,20	36	25	16	0,32±0,03	0.43	желтый
E-FLEX GOLD-241	3004	30	04 (4±0,5)	0,30	32	21	16	0,42±0,03	0.42	синий
E-FLEX GOLD-244	3506	35	06 (6±0,5)	0,35	32	21	16	0,53±0,03	0.44	зеленый
E-FLEX GOLD-253	2504	25	04 (4±0,5)	0,25	36	25	16	0,37±0,03	0.43	красный
	3004	30	04 (4±0,5)	0,30	36	25	16	0,42±0,03	0.43	синий
	3504	35	04 (4±0,5)	0,35	36	25	16	0,47±0,03	0.42	зеленый
E-FLEX GOLD-254	2504	25	04 (4±0,5)	0,25	32	21	16	0,37±0,03	0.42	красный
	3004	30	04 (4±0,5)	0,30	32	21	16	0,42±0,03	0.42	синий
	3504	35	04 (4±0,5)	0,35	32	21	16	0,47±0,03	0.41	зеленый
E-FLEX GOLD-255	2504	25	04 (4±0,5)	0,25	42	31	16	0,37±0,03	0.44	красный
	3004	30	04 (4±0,5)	0,30	42	31	16	0,42±0,03	0.44	синий
	3504	35	04 (4±0,5)	0,35	42	31	16	0,47±0,03	0.43	зеленый
E-FLEX GOLD-295	2006	20	06 (6±0,5)	0,20	42	31	16	0,38±0,03	0.42	желтый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм (±0,5 мм)	Длина оперативной части, мм (±0,5 мм) L ₁	Длина режущей части, мм (±0,5 мм) l _n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d ₃	Масса, г (±0,05 г)	Обозначение цвета
E-FLEX S-001	1904v	19	04v (4±0,5)	0,19	30	19	12	0,30±0,03	0.46	желтый
	1802v	18	02v (2±0,3)	0,18	32	21	16	0,25±0,03	0.46	фиолетовый
	2004v	20	04v (4±0,5)	0,20	32	21	16	0,33±0,03	0.46	белый
	2007v	20	07v (7±0,5)	0,20	32	21	16	0,39±0,03	0.46	желтый
	2508v	25	08v (8±0,5)	0,25	32	21	16	0,45±0,03	0.46	красный
E-FLEX S-002	1904v	19	04v (4±0,5)	0,19	30	19	12	0,30±0,03	0.46	желтый
	1802v	18	02v (2±0,3)	0,18	36	25	16	0,25±0,03	0.46	фиолетовый
	2004v	20	04v (4±0,5)	0,20	36	25	16	0,33±0,03	0.46	белый
	2007v	20	07v (7±0,5)	0,20	36	25	16	0,39±0,03	0.46	желтый
	2508v	25	08v (8±0,5)	0,25	36	25	16	0,45±0,03	0.46	красный
	3009v	30	09v (9±0,5)	0,30	36	25	16	0,53±0,03	0.46	синий
E-FLEX S-003	1904v	19	04v (4±0,5)	0,19	30	19	12	0,30±0,03	0.46	желтый
	1802v	18	02v (2±0,3)	0,18	42	31	16	0,25±0,03	0.46	фиолетовый
	2004v	20	04v (4±0,5)	0,20	42	31	16	0,33±0,03	0.46	белый
	2007v	20	07v (7±0,5)	0,20	42	31	16	0,39±0,03	0.46	желтый
	2508v	25	08v (8±0,5)	0,25	42	31	16	0,45±0,03	0.46	красный
	3009v	30	09v (9±0,5)	0,30	42	31	16	0,53±0,03	0.46	синий
E-FLEX S-004	1904v	19	04v (4±0,5)	0,19	32	21	12	0,30±0,03	0.46	желтый
E-FLEX S-005	1904v	19	04v (4±0,5)	0,19	36	25	12	0,30±0,03	0.46	желтый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм (±0,5 мм)	Длина оперативной части, мм (±0,5 мм) L ₁	Длина режущей части, мм (±0,5 мм) l _n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d ₃	Масса, г (±0,05 г)	Обозначение цвета
E-FLEX S-007	1802v	18	02v (2±0,3)	0,18	32	21	16	0,25±0,03	0.46	фиолетовый
E-FLEX S-008	1802v	18	02v (2±0,3)	0,18	36	25	16	0,25±0,03	0.46	фиолетовый
E-FLEX S-009	1802v	18	02v (2±0,3)	0,18	42	31	16	0,25±0,03	0.46	фиолетовый
E-FLEX S-010	2004v	20	04v (4±0,5)	0,20	32	21	16	0,33±0,03	0.46	белый
E-FLEX S-011	2004v	20	04v (4±0,5)	0,20	36	25	16	0,33±0,03	0.46	белый
E-FLEX S-012	2004v	20	04v (4±0,5)	0,20	42	31	16	0,33±0,03	0.46	белый
E-FLEX S-013	2007v	20	07v (7±0,5)	0,20	32	21	16	0,39±0,03	0.46	желтый
E-FLEX S-014	2007v	20	07v (7±0,5)	0,20	36	25	16	0,39±0,03	0.46	желтый
E-FLEX S-015	2007v	20	07v (7±0,5)	0,20	42	31	16	0,39±0,03	0.46	желтый
E-FLEX S-016	2508v	25	08v (8±0,5)	0,25	32	21	16	0,45±0,03	0.46	красный
E-FLEX S-017	2508v	25	08v (8±0,5)	0,25	36	25	16	0,45±0,03	0.46	красный
E-FLEX S-018	2508v	25	08v (8±0,5)	0,25	42	31	16	0,45±0,03	0.46	красный

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм (±0,5 мм)	Длина оперативной части, мм (±0,5 мм) L _t	Длина режущей части, мм (±0,5 мм) l _n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d ₃	Масса, г (±0,05 г)	Обозначение цвета
E-FLEX S-019	3009v	30	09v (9±0,5)	0,30	32	21	16	0,53±0,03	0.46	синий
E-FLEX S-020	3009v	30	09v (9±0,5)	0,30	36	25	16	0,53±0,03	0.46	синий
E-FLEX S-022	1904v	19	04v (4±0,5)	0,19	42	19	12	0,30±0,03	0.46	желтый
E-FLEX S-023	4006v	40	06v (6±0,5)	0,40	36	25	16	0,55±0,03	0.46	черный
	5005v	50	05v (5±0,5)	0,50	36	25	16	0,62±0,03	0.52	желтый
E-FLEX S-024	1904v	19	04v (4±0,5)	0,19	30	19	12	0,30±0,03	0.46	желтый
	1802v	18	02v (2±0,3)	0,18	32	21	16	0,25±0,03	0.46	фиолетовый
	2004v	20	04v (4±0,5)	0,20	32	21	16	0,33±0,03	0.46	белый
	2007v	20	07v (7±0,5)	0,20	32	21	16	0,39±0,03	0.46	желтый
	2508v	25	08v (8±0,5)	0,25	32	21	16	0,45±0,03	0.46	Красный
й	3009v	30	09v (9±0,5)	0,30	32	21	16	0,53±0,03	0.46	синий
E-FLEX S-025	1904v	19	04v (4±0,5)	0,19	30	19	12	0,30±0,03	0.46	желтый
	1802v	18	02v (2±0,3)	0,18	36	25	16	0,25±0,03	0.46	фиолетовый
	2004v	20	04v (4±0,5)	0,20	36	25	16	0,33±0,03	0.46	белый
	2007v	20	07v (7±0,5)	0,20	36	25	16	0,39±0,03	0.46	желтый
	2508v	25	08v (8±0,5)	0,25	36	25	16	0,45±0,03	0.46	Красный
	4006v	40	06v (6±0,5)	0,40	36	25	16	0,55±0,03	0.46	синий

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX S-026	1904v	19	04v ($4\pm 0,5$)	0,19	30	19	12	$0,30\pm 0,03$	0.46	желтый
	1802v	18	02v ($2\pm 0,3$)	0,18	42	31	16	$0,25\pm 0,03$	0.46	фиолетовый
	2004v	20	04v ($4\pm 0,5$)	0,20	42	31	16	$0,33\pm 0,03$	0.46	белый
	2007v	20	07v ($7\pm 0,5$)	0,20	42	31	16	$0,39\pm 0,03$	0.46	желтый
	2508v	25	08v ($8\pm 0,5$)	0,25	42	31	16	$0,45\pm 0,03$	0.46	Красный
	5005v	50	05v ($5\pm 0,5$)	0,50	42	31	16	$0,62\pm 0,03$	0.52	желтый
E-FLEX S-027	4006v	40	06v ($6\pm 0,5$)	0,40	36	25	16	$0,55\pm 0,03$	0.46	черный
E-FLEX S-028	5005v	50	05v ($5\pm 0,5$)	0,50	36	25	16	$0,62\pm 0,03$	0.46	желтый
E-FLEX S-041	1802v	18	02v ($2\pm 0,3$)	0,18	36	25	16	$0,25\pm 0,03$	0.46	фиолетовый
E-FLEX S-042	2004v	20	04v ($4\pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,33\pm 0,03$	0.46	белый
E-FLEX S-043	1904v	19	04v ($4\pm 0,5$)	0,19	30	19	12	$0,30\pm 0,03$	0.46	желтый
E-FLEX S-044	2007v	20	07v ($7\pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,39\pm 0,03$	0.46	желтый
E-FLEX S-045	2508v	25	08v ($8\pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,45\pm 0,03$	0.46	Красный
E-FLEX S-046	3009v	30	09v ($9\pm 0,5$)	0,30	36	25	16	$0,53\pm 0,03$	0.46	синий

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм (±0,5 мм)	Длина оперативной части, мм (±0,5 мм) L _t	Длина режущей части, мм (±0,5 мм) l _n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d ₃	Масса, г (±0,05 г)	Обозначение цвета
E-FLEX S-050	1904v	19	04v (4±0,5)	0,19	30	19	12	0,30±0,03	0.46	желтый
	2004v	20	04v (4±0,5)	0,20	36	25	16	0,33±0,03	0.46	белый
	2007v	20	07v (7±0,5)	0,20	36	25	16	0,39±0,03	0.46	желтый
E-FLEX S-051	1904v	19	04v (4±0,5)	0,19	30	19	12	0,30±0,03	0.46	желтый
	2004v	20	04v (4±0,5)	0,20	42	31	16	0,33±0,03	0.46	белый
	2007v	20	07v (7±0,5)	0,20	42	31	16	0,39±0,03	0.46	желтый
E-FLEX S-052	1904v	19	04v (7±0,5)	0,19	30	19	12	0,30±0,03	0.46	желтый
	2004v	20	04v (4±0,5)	0,20	32	21	16	0,33±0,03	0.46	белый
	2007v	20	07v (7±0,5)	0,20	32	21	16	0,39±0,03	0.46	желтый
E-FLEX S-053	1904v	19	04v (4±0,5)	0,19	30	19	12	0,30±0,03	0.46	желтый
	1802v	18	02v (2±0,3)	0,18	36	25	16	0,25±0,03	0.46	фиолетовый
	2004v	20	04v (4±0,5)	0,20	36	25	16	0,33±0,03	0.46	белый
	2007v	20	07v (7±0,5)	0,20	36	25	16	0,39±0,03	0.46	желтый
	2508v	25	08v (8±0,5)	0,25	36	25	16	0,45±0,03	0.46	красный
E-FLEX S-055	1802v	18	02v (2±0,3)	0,18	42	31	16	0,25±0,03	0.46	фиолетовый
E-FLEX S-056	2004v	20	04v (4±0,5)	0,20	42	31	16	0,33±0,03	0.46	белый
E-FLEX S-057	2007v	20	07v (7±0,5)	0,20	42	31	16	0,39±0,03	0.46	желтый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_t	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX S-058	2508v	25	08v ($8 \pm 0,5$)	0,25	42	31	16	$0,45 \pm 0,03$	0.46	красный
E-FLEX S-059	1904v	19	04v ($4 \pm 0,5$)	0,19	30	19	12	$0,30 \pm 0,03$	0.46	желтый
	1802v	18	02v ($2 \pm 0,3$)	0,18	42	31	16	$0,25 \pm 0,03$	0.46	фиолетовый
	2004v	20	04v ($4 \pm 0,5$)	0,20	42	31	16	$0,33 \pm 0,03$	0.46	белый
	2007v	20	07v ($7 \pm 0,5$)	0,20	42	31	16	$0,39 \pm 0,03$	0.46	желтый
	2508v	25	08v ($8 \pm 0,5$)	0,25	42	31	16	$0,45 \pm 0,03$	0.46	Красный
	3009v	30	09v ($9 \pm 0,5$)	0,30	42	31	16	$0,53 \pm 0,03$	0.46	синий
E-FLEX S-060	1802v	18	02v ($2 \pm 0,3$)	0,18	32	21	16	$0,25 \pm 0,03$	0.46	фиолетовый
E-FLEX S-061	2004v	20	04v ($4 \pm 0,5$)	0,20	32	21	16	$0,33 \pm 0,03$	0.46	белый
E-FLEX S-062	2007v	20	07v ($7 \pm 0,5$)	0,20	32	21	16	$0,39 \pm 0,03$	0.46	желтый
E-FLEX S-063	2508v	25	08v ($8 \pm 0,5$)	0,25	32	21	16	$0,45 \pm 0,03$	0.46	Красный
E-FLEX S-064	1904v	19	04v ($4 \pm 0,5$)	0,19	30	19	12	$0,30 \pm 0,03$	0.46	желтый
	1802v	18	02v ($2 \pm 0,3$)	0,18	32	21	16	$0,25 \pm 0,03$	0.46	фиолетовый
	2004v	20	04v ($4 \pm 0,5$)	0,20	32	21	16	$0,33 \pm 0,03$	0.46	белый
	2007v	20	07v ($7 \pm 0,5$)	0,20	32	21	16	$0,39 \pm 0,03$	0.46	желтый
	2508v	25	08v ($8 \pm 0,5$)	0,25	32	21	16	$0,45 \pm 0,03$	0.46	Красный
	3009v	30	09v ($9 \pm 0,5$)	0,30	32	21	16	$0,53 \pm 0,03$	0.46	синий

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX S-065	1802v	18	02v ($2\pm 0,3$)	0,18	30	19	16	0,25 $\pm 0,03$	0.46	фиолетовый
E-FLEX S-066	1402v	14	02v ($2\pm 0,3$)	0,14	32	21	16	0,25 $\pm 0,03$	0.46	фиолетовый
E-FLEX S-067	1402v	14	02v ($2\pm 0,3$)	0,14	36	25	16	0.20 $\pm 0,03$	0.46	фиолетовый
E-FLEX S-068	1402v	14	02v ($2\pm 0,3$)	0,14	42	31	16	0.20 $\pm 0,03$	0.46	фиолетовый
E-FLEX S-069	1702v	17	02v ($2\pm 0,3$)	0,17	32	21	16	0.20 $\pm 0,03$	0.46	белый
E-FLEX S-070	1702v	17	02v ($2\pm 0,3$)	0,17	36	25	16	0.23 $\pm 0,03$	0.46	белый
E-FLEX S-071	1702v	17	02v ($2\pm 0,3$)	0,17	42	31	16	0.23 $\pm 0,03$	0.46	белый
E-FLEX S-072	1905v	19	05v ($5\pm 0,5$)	0,19	32	21	16	0.23 $\pm 0,03$	0.46	желтый
E-FLEX S-073	1905v	19	05v ($5\pm 0,5$)	0,19	36	25	16	0.25 $\pm 0,03$	0.46	желтый
E-FLEX S-074	1905v	19	05v ($5\pm 0,5$)	0,19	42	31	16	0.25 $\pm 0,03$	0.46	желтый
E-FLEX S-075	2505v	25	05v ($5\pm 0,5$)	0,25	32	21	16	0.25 $\pm 0,03$	0.46	красный
E-FLEX S-076	2505v	25	05v ($5\pm 0,5$)	0,25	36	25	16	0.40 $\pm 0,03$	0.46	красный

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX S-077	2505v	25	05v ($5 \pm 0,5$)	0,25	42	31	16	$0.40 \pm 0,03$	0.46	красный
E-FLEX S-078	3005v	30	05v ($5 \pm 0,5$)	0,30	32	21	16	$0.40 \pm 0,03$	0.46	синий
E-FLEX S-079	3005v	30	05v ($5 \pm 0,5$)	0,30	36	25	16	$0.45 \pm 0,03$	0.46	синий
E-FLEX S-080	3005v	30	05v ($5 \pm 0,5$)	0,30	42	31	16	$0.45 \pm 0,03$	0.46	синий
E-FLEX S-081	4005v	40	05v ($5 \pm 0,5$)	0,40	32	21	16	$0.45 \pm 0,03$	0.46	желтый
E-FLEX S-082	4005v	40	05v ($5 \pm 0,5$)	0,40	36	25	16	$0.55 \pm 0,03$	0.46	желтый
E-FLEX S-083	4005v	40	05v ($5 \pm 0,5$)	0,40	42	31	16	$0.55 \pm 0,03$	0.46	желтый
E-FLEX S-084	5005v	50	05v ($5 \pm 0,5$)	0,50	32	21	16	$0.62 \pm 0,03$	0.52	желтый
E-FLEX S-085	5005v	50	05v ($5 \pm 0,5$)	0,50	36	25	16	$0.62 \pm 0,03$	0.52	желтый
E-FLEX S-086	5005v	50	05v ($5 \pm 0,5$)	0,50	42	31	16	$0.62 \pm 0,03$	0.46	желтый
E-FLEX S-087	1802v	18	02v ($2 \pm 0,3$)	0,18	30	19	16	$0.25 \pm 0,03$	0.46	фиолетовый
	1402v	14	02v ($2 \pm 0,3$)	0,14	32	21	16	$0.20 \pm 0,03$	0.46	фиолетовый
	1702v	17	02v ($2 \pm 0,3$)	0,17	32	21	16	$0.23 \pm 0,03$	0.46	белый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм (±0,5 мм)	Длина оперативной части, мм (±0,5 мм) L _t	Длина режущей части, мм (±0,5 мм) l _n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d ₃	Масса, г (±0,05 г)	Обозначение цвета
	1905v	19	05v (5±0,5)	0,19	32	21	16	0.25±0,03	0.46	желтый
	2505v	25	05v (5±0,5)	0,25	32	21	16	0.40±0,03	0.46	красный
	3005v	30	05v (5±0,5)	0,30	32	21	16	0.45±0,03	0.46	синий
E-FLEX S-088	1802v	18	02v (2±0,3)	0,18	30	19	16	0,25±0,03	0.46	фиолетовый
	1402v	14	02v (2±0,3)	0,14	36	25	16	0.20±0,03	0.46	фиолетовый
	1702v	17	02v (2±0,3)	0,17	36	25	16	0.23±0,03	0.46	белый
	1905v	19	05v (5±0,5)	0,19	36	25	16	0.25±0,03	0.46	желтый
	2505v	25	05v (5±0,5)	0,25	36	25	16	0.40±0,03	0.46	красный
	3005v	30	05v (5±0,5)	0,30	36	25	16	0.45±0,03	0.46	синий
E-FLEX S-089	1802v	18	02v (2±0,3)	0,18	30	19	16	0,25±0,03	0.46	фиолетовый
	1402v	14	02v (2±0,3)	0,14	42	31	16	0.20±0,03	0.46	фиолетовый
	1702v	17	02v (2±0,3)	0,17	42	31	16	0.23±0,03	0.46	белый
	1905v	19	05v (5±0,5)	0,19	42	31	16	0.25±0,03	0.46	желтый
	2505v	25	05v (5±0,5)	0,25	42	31	16	0.40±0,03	0.46	красный
	3005v	30	05v (5±0,5)	0,30	42	31	16	0.45±0,03	0.46	синий
E-FLEX S-090	1402v	14	02v (2±0,3)	0,14	32	21	16	0.20±0,03	0.46	фиолетовый
	1702v	17	02v (2±0,3)	0,17	32	21	16	0.23±0,03	0.46	белый
	1905v	19	05v (5±0,5)	0,19	32	21	16	0.25±0,03	0.46	желтый
	2505v	25	05v (5±0,5)	0,25	32	21	16	0.40±0,03	0.46	красный
E-FLEX S-091	1402v	14	02v (2±0,3)	0,14	36	25	16	0.20±0,03	0.46	фиолетовый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
	1702v	17	02v ($2 \pm 0,3$)	0,17	36	25	16	$0,23 \pm 0,03$	0.46	белый
	1905v	19	05v ($5 \pm 0,5$)	0,19	36	25	16	$0,25 \pm 0,03$	0.46	желтый
	2505v	25	05v ($5 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,40 \pm 0,03$	0.46	красный
E-FLEX S-092	1402v	14	02v ($2 \pm 0,3$)	0,14	42	31	16	$0,20 \pm 0,03$	0.46	фиолетовый
	1702v	17	02v ($2 \pm 0,3$)	0,17	42	31	16	$0,23 \pm 0,03$	0.46	белый
	1905v	19	05v ($5 \pm 0,5$)	0,19	42	31	16	$0,25 \pm 0,03$	0.46	желтый
	2505v	25	05v ($5 \pm 0,5$)	0,25	42	31	16	$0,40 \pm 0,03$	0.46	красный
E-FLEX S-096	2004v	20	04v ($4 \pm 0,5$)	0,20	32	21	16	$0,33 \pm 0,03$	0.46	белый
E-FLEX S-097	2004v	20	04v ($4 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,33 \pm 0,03$	0.46	белый
E-FLEX S-098	2004v	20	04v ($4 \pm 0,5$)	0,20	42	31	16	$0,33 \pm 0,03$	0.46	белый
E-FLEX S-099	2504v	25	04v ($4 \pm 0,5$)	0,25	32	21	16	$0,37 \pm 0,03$	0.46	красный
E-FLEX S-100	2504v	25	04v ($4 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,37 \pm 0,03$	0.46	красный
E-FLEX S-101	2504v	25	04v ($4 \pm 0,5$)	0,25	42	31	16	$0,37 \pm 0,03$	0.46	красный
E-FLEX MINI-003	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	27	16	13	$0,38 \pm 0,03$	0.39	желтый
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	27	16	13	$0,43 \pm 0,03$	0.41	красный
	3006	30	06 ($6 \pm 0,5$)	0,30	27	16	13	$0,48 \pm 0,03$	0.43	синий

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX MINI-006	1708	17	08 ($8\pm 0,5$)	0,17	21	10	4	$0,41\pm 0,03$	0.39	желтый
	2006	20	06 ($6\pm 0,5$)	0,20	27	16	13	$0,38\pm 0,03$	0.40	желтый
	2506	25	06 ($6\pm 0,5$)	0,25	27	16	13	$0,43\pm 0,03$	0.42	красный
	3006	30	06 ($6\pm 0,5$)	0,30	27	16	13	$0,48\pm 0,03$	0.44	желтый
E-FLEX MINI-007	1708	17	08 ($8\pm 0,5$)	0,17	21	10	4	$0,41\pm 0,03$	0.39	желтый
E-FLEX MINI-010	3004	30	04 ($4\pm 0,5$)	0,30	27	16	13	$0,42\pm 0,03$	0.40	синий
E-FLEX MINI-012	2006	20	06 ($6\pm 0,5$)	0,20	27	16	13	$0,38\pm 0,03$	0.39	желтый
	2506	25	06 ($6\pm 0,5$)	0,25	27	16	13	$0,43\pm 0,03$	0.41	красный
	3006	30	06 ($6\pm 0,5$)	0,30	27	16	13	$0,48\pm 0,03$	0.43	желтый
E-FLEX MINI-013	2504	25	04 ($4\pm 0,5$)	0,25	27	16	13	$0,37\pm 0,03$	0.41	красный
E-FLEX BLUE-151	7004	70	04 ($4\pm 0,5$)	0,70	36	25	16	$0,82\pm 0,04$	0.52	зеленый
E-FLEX BLUE-152	7004	70	04 ($4\pm 0,5$)	0,70	32	21	16	$0,82\pm 0,04$	0.50	зеленый
E-FLEX BLUE-153	7004	70	04 ($4\pm 0,5$)	0,70	42	31	16	$0,82\pm 0,04$	0.53	зеленый
E-FLEX BLUE-157	4504	45	04 ($4\pm 0,5$)	0,45	36	25	16	$0,57\pm 0,03$	0.44	белый
	5004	50	04 ($4\pm 0,5$)	0,50	36	25	16	$0,62\pm 0,03$	0.45	желтый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
	5504	55	04 ($4 \pm 0,5$)	0,55	36	25	16	$0,67 \pm 0,03$	0.46	красный
	6004	60	04 ($4 \pm 0,5$)	0,60	36	25	16	$0,72 \pm 0,03$	0.47	синий
	7004	70	04 ($4 \pm 0,5$)	0,70	36	25	16	$0,82 \pm 0,04$	0.52	зеленый
	8004	80	04 ($4 \pm 0,5$)	0,80	36	25	16	$0,92 \pm 0,04$	0.59	черный
E-FLEX BLUE-158	4504	45	04 ($4 \pm 0,5$)	0,45	32	21	16	$0,57 \pm 0,03$	0.43	белый
	5004	50	04 ($4 \pm 0,5$)	0,50	32	21	16	$0,62 \pm 0,03$	0.44	желтый
	5504	55	04 ($4 \pm 0,5$)	0,55	32	21	16	$0,67 \pm 0,03$	0.45	красный
	6004	60	04 ($4 \pm 0,5$)	0,60	32	21	16	$0,72 \pm 0,03$	0.46	синий
	7004	70	04 ($4 \pm 0,5$)	0,70	32	21	16	$0,82 \pm 0,04$	0.50	зеленый
	8004	80	04 ($4 \pm 0,5$)	0,80	32	21	16	$0,92 \pm 0,04$	0.58	черный
E-FLEX BLUE-159	4504	45	04 ($4 \pm 0,5$)	0,45	42	31	16	$0,57 \pm 0,03$	0.45	белый
	5004	50	04 ($4 \pm 0,5$)	0,50	42	31	16	$0,62 \pm 0,03$	0.46	желтый
	5504	55	04 ($4 \pm 0,5$)	0,55	42	31	16	$0,67 \pm 0,03$	0.47	красный
	6004	60	04 ($4 \pm 0,5$)	0,60	42	31	16	$0,72 \pm 0,03$	0.48	синий
	7004	70	04 ($4 \pm 0,5$)	0,70	42	31	16	$0,82 \pm 0,04$	0.53	зеленый
	8004	80	04 ($4 \pm 0,5$)	0,80	42	31	16	$0,92 \pm 0,04$	0.60	черный
E-FLEX GOLD-231	4504	45	04 ($4 \pm 0,5$)	0,45	36	25	16	$0,57 \pm 0,03$	0.44	белый
	5004	50	04 ($4 \pm 0,5$)	0,50	36	25	16	$0,62 \pm 0,03$	0.45	желтый
	5504	55	04 ($4 \pm 0,5$)	0,55	36	25	16	$0,67 \pm 0,03$	0.46	красный
	6004	60	04 ($4 \pm 0,5$)	0,60	36	25	16	$0,72 \pm 0,03$	0.47	синий
	7004	70	04 ($4 \pm 0,5$)	0,70	36	25	16	$0,82 \pm 0,04$	0.52	зеленый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, %, α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
	8004	80	04 ($4 \pm 0,5$)	0,80	36	25	16	$0,92 \pm 0,04$	0.59	черный
E-FLEX GOLD-303	7004	70	04 ($4 \pm 0,5$)	0,70	42	31	25	$0,82 \pm 0,04$	0.53	зеленый
E-FLEX BLUE-154	8004	80	04 ($4 \pm 0,5$)	0,80	36	25	16	$0,92 \pm 0,04$	0.59	черный
E-FLEX BLUE-155	8004	80	04 ($4 \pm 0,5$)	0,80	32	21	16	$0,92 \pm 0,04$	0.58	черный
E-FLEX BLUE-156	8004	80	04 ($4 \pm 0,5$)	0,80	42	31	16	$0,92 \pm 0,04$	0.60	черный
E-FLEX GOLD-304	8004	80	04 ($4 \pm 0,5$)	0,80	36	25	16	$0,92 \pm 0,04$	0.59	черный

Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм (±0,5 мм)	Длина оперативной части, мм (±0,5 мм) L ₁	Длина режущей части, мм (±0,5 мм) l _n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d ₃	Масса, г (±0,05 г)	Обозначение цвета
E-FLEX-009	1504	15	04 (4±0,5)	0,15	36	25	16	0,27±0,03	0.41	белый
E-FLEX-040	1902	19	02 (2±0,3)	0,19	36	25	16	0,25±0,02	0.40	желтый
E-FLEX-045	1302	13	02 (2±0,3)	0,13	36	25	16	0,19±0,02	0.40	фиолетовый
	1602	16	02 (2±0,3)	0,16	36	25	16	0,22±0,02	0.40	белый
	1902	19	02 (2±0,3)	0,19	36	25	16	0,25±0,02	0.40	желтый
E-FLEX-067	1302	13	02 (2±0,3)	0,13	36	25	16	0,19±0,02	0.40	фиолетовый
	1503	15	03 (3±0,3)	0,15	36	25	16	0,25±0,03	0.41	белый
E-FLEX-068	1302	13	02 (2±0,3)	0,13	32	21	16	0,25±0,02	0.39	фиолетовый
	1602	16	02 (2±0,3)	0,16	32	21	16	0,19±0,02	0.39	белый
	1902	19	02 (2±0,3)	0,19	32	21	16	0,25±0,03	0.39	желтый
E-FLEX-086	1302	13	02 (2±0,3)	0,13	36	25	16	0,25±0,02	0.40	фиолетовый
	1602	16	02 (2±0,3)	0,16	36	25	16	0,22±0,02	0.40	белый
	1902	19	02 (2±0,3)	0,19	36	25	16	0,25±0,02	0.40	желтый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % а Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
	1503	15	03 ($3\pm 0,3$)	0,15	36	25	16	$0,25\pm 0,03$	0.41	белый
E-FLEX-088	1503	15	03 ($3\pm 0,3$)	0,15	32	21	16	$0,25\pm 0,03$	0.40	белый
E-FLEX-089	1503	15	03 ($3\pm 0,3$)	0,15	36	25	16	$0,25\pm 0,03$	0.41	белый
E-FLEX-092	2004	20	04 ($4\pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,32\pm 0,03$	0.43	желтый
E-FLEX-096	1602	16	02 ($2\pm 0,3$)	0,16	36	25	16	$0,22\pm 0,02$	0.40	белый
E-FLEX-097	1302	13	02 ($2\pm 0,3$)	0,13	36	25	16	$0,19\pm 0,02$	0.40	фиолетовый
E-FLEX-099	1302	13	02 ($2\pm 0,3$)	0,13	32	21	16	$0,19\pm 0,02$	0.39	фиолетовый
	1602	16	02 ($2\pm 0,3$)	0,16	32	21	16	$0,22\pm 0,02$	0.39	белый
	1902	19	02 ($2\pm 0,3$)	0,19	32	21	16	$0,25\pm 0,02$	0.39	желтый
	1503	15	03 ($3\pm 0,3$)	0,15	32	21	16	$0,24\pm 0,03$	0.40	белый
E-FLEX-106	1302	13	02 ($2\pm 0,3$)	0,13	42	31	16	$0,19\pm 0,02$	0.41	фиолетовый
	1602	16	02 ($2\pm 0,3$)	0,16	42	31	16	$0,22\pm 0,02$	0.41	белый
	1902	19	02 ($2\pm 0,3$)	0,19	42	31	16	$0,25\pm 0,02$	0.41	желтый
	1503	15	03 ($3\pm 0,3$)	0,15	42	31	16	$0,24\pm 0,03$	0.42	белый
E-FLEX-107	1002	10	02 ($2\pm 0,3$)	0,10	42	31	16	$0,16\pm 0,02$	0.41	фиолетовый
E-FLEX BLUE-013	1504	15	04 ($4\pm 0,5$)	0,15	32	21	16	$0,27\pm 0,03$	0.40	белый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX BLUE-045	2004	20	04 ($4 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,32 \pm 0,03$	0.43	желтый
E-FLEX BLUE-058	1504	15	04 ($4 \pm 0,5$)	0,15	42	31	16	$0,27 \pm 0,03$	0.42	белый
E-FLEX BLUE-059	2004	20	04 ($4 \pm 0,5$)	0,20	42	31	16	$0,32 \pm 0,03$	0.44	желтый
E-FLEX BLUE-069	2004	20	04 ($4 \pm 0,5$)	0,20	32	21	16	$0,32 \pm 0,03$	0.42	желтый
E-FLEX BLUE-096	1604	16	04 ($4 \pm 0,5$)	0,16	36	25	16	$0,28 \pm 0,03$	0.40	белый
E-FLEX BLUE-104	1902	19	02 ($2 \pm 0,3$)	0,19	32	21	16	$0,25 \pm 0,03$	0.39	желтый
E-FLEX BLUE-105	1302	13	02 ($2 \pm 0,3$)	0,13	36	25	16	$0,19 \pm 0,02$	0.40	фиолетовый
E-FLEX BLUE-106	1602	16	02 ($2 \pm 0,3$)	0,16	36	25	16	$0,22 \pm 0,02$	0.40	белый
E-FLEX BLUE -110	4502	45	02 ($2 \pm 0,3$)	0,45	36	25	16	$0,51 \pm 0,02$	0.40	белый
	5002	50	02 ($2 \pm 0,3$)	0,50	36	25	16	$0,56 \pm 0,02$	0.41	желтый
	5502	55	02 ($2 \pm 0,3$)	0,55	36	25	16	$0,61 \pm 0,02$	0.42	красный
	6002	60	02 ($2 \pm 0,3$)	0,60	36	25	16	$0,66 \pm 0,02$	0.43	синий
E-FLEX BLUE -111	4502	45	02 ($2 \pm 0,3$)	0,45	42	31	16	$0,51 \pm 0,02$	0.41	белый
	5002	50	02 ($2 \pm 0,3$)	0,50	42	31	16	$0,56 \pm 0,02$	0.42	желтый
	5502	55	02 ($2 \pm 0,3$)	0,55	42	31	16	$0,61 \pm 0,02$	0.43	красный

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
	6002	60	02 ($2\pm 0,3$)	0,60	42	31	16	$0,66\pm 0,02$	0.44	синий
E-FLEX BLUE-121	1504	15	04 ($4\pm 0,5$)	0,15	36	25	16	$0,27\pm 0,03$	0.41	белый
E-FLEX BLUE -122	1302	13	02 ($2\pm 0,3$)	0,13	36	25	16	$0,19\pm 0,02$	0.40	фиолетовый
	1503	15	03 ($3\pm 0,3$)	0,15	36	25	16	$0,24\pm 0,03$	0.41	белый
E-FLEX BLUE -125	1302	13	02 ($2\pm 0,3$)	0,13	36	25	16	$0,19\pm 0,02$	0.40	фиолетовый
	1602	16	02 ($2\pm 0,3$)	0,16	36	25	16	$0,22\pm 0,02$	0.40	белый
	1902	19	02 ($2\pm 0,3$)	0,19	36	25	16	$0,25\pm 0,03$	0.40	желтый
E-FLEX BLUE-129	1602	16	02 ($2\pm 0,3$)	0,16	32	21	16	$0,22\pm 0,02$	0.39	белый
E-FLEX BLUE-130	1503	15	03 ($3\pm 0,3$)	0,15	36	25	16	$0,24\pm 0,03$	0.41	белый
E-FLEX BLUE-134	1302	13	02 ($2\pm 0,3$)	0,13	36	25	16	$0,19\pm 0,02$	0.40	фиолетовый
	1602	16	02 ($2\pm 0,3$)	0,16	36	25	16	$0,22\pm 0,02$	0.40	белый
	1902	19	02 ($2\pm 0,3$)	0,19	36	25	16	$0,25\pm 0,03$	0.40	желтый
	1503	15	03 ($3\pm 0,3$)	0,15	36	25	16	$0,24\pm 0,03$	0.41	белый
E-FLEX BLUE-136	1303	13	03 ($3\pm 0,3$)	0,13	36	25	16	$0,22\pm 0,03$	0.41	фиолетовый
	1504	15	04 ($4\pm 0,5$)	0,15	36	25	16	$0,27\pm 0,03$	0.41	белый
E-FLEX BLUE -186	1302	13	02 ($2\pm 0,3$)	0,13	32	21	16	$0,19\pm 0,02$	0.39	фиолетовый
	1602	16	02 ($2\pm 0,3$)	0,16	32	21	16	$0,22\pm 0,02$	0.39	белый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
	1902	19	02 ($2\pm 0,3$)	0,19	32	21	16	$0,25\pm 0,03$	0.39	желтый
	1503	15	03 ($3\pm 0,3$)	0,15	32	21	16	$0,24\pm 0,03$	0.40	белый
E-FLEX BLUE -187	1302	13	02 ($2\pm 0,3$)	0,13	42	31	16	$0,19\pm 0,02$	0.41	фиолетовый
	1602	16	02 ($2\pm 0,3$)	0,16	42	31	16	$0,22\pm 0,02$	0.41	белый
	1902	19	02 ($2\pm 0,3$)	0,19	42	31	16	$0,25\pm 0,03$	0.40	желтый
	1503	15	03 ($3\pm 0,3$)	0,15	42	31	16	$0,24\pm 0,03$	0.42	белый
E-FLEX BLUE -198	1302	13	02 ($2\pm 0,3$)	0,13	32	21	16	$0,19\pm 0,02$	0.39	фиолетовый
	1602	16	02 ($2\pm 0,3$)	0,16	32	21	16	$0,22\pm 0,02$	0.39	белый
	1902	19	02 ($2\pm 0,3$)	0,19	32	21	16	$0,25\pm 0,03$	0.39	желтый
E-FLEX BLUE -199	1302	13	02 ($2\pm 0,3$)	0,13	36	25	16	$0,19\pm 0,02$	0.40	фиолетовый
	1602	16	02 ($2\pm 0,3$)	0,16	36	25	16	$0,22\pm 0,02$	0.40	белый
	1902	19	02 ($2\pm 0,3$)	0,19	36	25	16	$0,25\pm 0,03$	0.40	желтый
E-FLEX BLUE-206	1902	19	02 ($2\pm 0,3$)	0,19	36	25	16	$0,25\pm 0,03$	0.40	желтый
E-FLEX BLUE-209	1302	13	02 ($2\pm 0,3$)	0,13	32	21	16	$0,19\pm 0,02$	0.39	фиолетовый
E-FLEX BLUE -210	1302	13	02 ($2\pm 0,3$)	0,13	36	25	16	$0,19\pm 0,02$	0.40	фиолетовый
	1602	16	02 ($2\pm 0,3$)	0,16	36	25	16	$0,22\pm 0,02$	0.40	белый
	1902	19	02 ($2\pm 0,3$)	0,19	36	25	16	$0,25\pm 0,03$	0.40	желтый
	1503	15	03 ($3\pm 0,3$)	0,15	36	25	16	$0,24\pm 0,03$	0.41	белый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_t	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX BLUE-217	1503	15	03 ($3 \pm 0,3$)	0,15	32	21	16	$0,24 \pm 0,03$	0.40	белый
E-FLEX BLUE-222	1002	10	02 ($2 \pm 0,3$)	0,10	32	21	16	$0,16 \pm 0,02$	0.39	фиолетовый
E-FLEX BLUE-223	1002	10	02 ($2 \pm 0,3$)	0,10	36	25	16	$0,16 \pm 0,02$	0.40	фиолетовый
E-FLEX BLUE-240	1004	10	04 ($4 \pm 0,5$)	0,10	36	25	16	$0,22 \pm 0,02$	0.40	фиолетовый
E-FLEX BLUE-254	1902	19	02 ($2 \pm 0,3$)	0,19	42	31	16	$0,25 \pm 0,03$	0.41	желтый
E-FLEX BLUE-256	1303	13	03 ($3 \pm 0,3$)	0,13	32	21	16	$0,22 \pm 0,03$	0.40	фиолетовый
E-FLEX BLUE-259	3003	30	03 ($3 \pm 0,3$)	0,30	32	21	16	$0,39 \pm 0,03$	0.41	синий
E-FLEX BLUE-260	3003	30	03 ($3 \pm 0,3$)	0,30	36	25	16	$0,39 \pm 0,03$	0.42	синий
E-FLEX BLUE-261	3003	30	03 ($3 \pm 0,3$)	0,30	42	31	16	$0,39 \pm 0,03$	0.43	зеленый
E-FLEX BLUE-262	3503	35	03 ($3 \pm 0,3$)	0,35	32	21	16	$0,44 \pm 0,03$	0.42	зеленый
E-FLEX BLUE-263	3503	35	03 ($3 \pm 0,3$)	0,35	36	25	16	$0,44 \pm 0,03$	0.43	зеленый
E-FLEX BLUE-264	3503	35	03 ($3 \pm 0,3$)	0,35	42	31	16	$0,44 \pm 0,03$	0.44	зеленый
E-FLEX BLUE-265	4003	40	03 ($3 \pm 0,3$)	0,40	32	21	16	$0,49 \pm 0,03$	0.41	черный

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_t	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX BLUE-266	4003	40	03 ($3 \pm 0,3$)	0,40	36	25	16	$0,49 \pm 0,03$	0.42	черный
E-FLEX BLUE-267	4003	40	03 ($3 \pm 0,3$)	0,40	42	31	16	$0,49 \pm 0,03$	0.43	черный
E-FLEX BLUE-268	5003	50	03 ($3 \pm 0,3$)	0,50	32	21	16	$0,59 \pm 0,03$	0.43	желтый
E-FLEX BLUE-269	5003	50	03 ($3 \pm 0,3$)	0,50	36	25	16	$0,59 \pm 0,03$	0.44	желтый
E-FLEX BLUE-270	5003	50	03 ($3 \pm 0,3$)	0,50	42	31	16	$0,59 \pm 0,03$	0.45	желтый
E-FLEX BLUE -271	3003	30	03 ($3 \pm 0,3$)	0,30	32	21	16	$0,39 \pm 0,03$	0.41	синий
	3503	35	03 ($3 \pm 0,3$)	0,35	32	21	16	$0,44 \pm 0,03$	0.42	зеленый
	4003	40	03 ($3 \pm 0,3$)	0,40	32	21	16	$0,49 \pm 0,03$	0.41	черный
	5003	50	03 ($3 \pm 0,3$)	0,50	32	21	16	$0,59 \pm 0,03$	0.43	желтый
E-FLEX BLUE -272	3003	30	03 ($3 \pm 0,3$)	0,30	36	25	16	$0,39 \pm 0,03$	0.42	синий
	3503	35	03 ($3 \pm 0,3$)	0,35	36	25	16	$0,44 \pm 0,03$	0.43	зеленый
	4003	40	03 ($3 \pm 0,3$)	0,40	36	25	16	$0,49 \pm 0,03$	0.42	черный
	5003	50	03 ($3 \pm 0,3$)	0,50	36	25	16	$0,59 \pm 0,03$	0.44	желтый
E-FLEX BLUE -273	3003	30	03 ($3 \pm 0,3$)	0,30	42	31	16	$0,39 \pm 0,03$	0.43	синий
	3503	35	03 ($3 \pm 0,3$)	0,35	42	31	16	$0,44 \pm 0,03$	0.44	зеленый
	4003	40	03 ($3 \pm 0,3$)	0,40	42	31	16	$0,49 \pm 0,03$	0.43	черный
	5003	50	03 ($3 \pm 0,3$)	0,50	42	31	16	$0,59 \pm 0,03$	0.45	желтый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX GOLD-046	1302	13	02 ($2\pm 0,3$)	0,13	36	25	16	$0,19\pm 0,02$	0.40	фиолетовый
E-FLEX GOLD-048	1502	15	02 ($2\pm 0,3$)	0,15	36	25	16	$0,21\pm 0,02$	0.39	белый
E-FLEX GOLD-050	1602	16	02 ($2\pm 0,3$)	0,16	36	25	16	$0,22\pm 0,02$	0.40	белый
E-FLEX GOLD-071	1504	15	04 ($4\pm 0,5$)	0,15	36	25	16	$0,27\pm 0,03$	0.41	белый
E-FLEX GOLD-025	5002	50	02 ($2\pm 0,3$)	0,50	36	25	16	$0,61\pm 0,02$	0.41	желтый
E-FLEX GOLD-091	1504	15	04 ($4\pm 0,5$)	0,15	36	25	16	$0,27\pm 0,03$	0.41	белый
	2004	20	04 ($4\pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,32\pm 0,03$	0.43	желтый
E-FLEX GOLD-097	1503	15	03 ($3\pm 0,3$)	0,15	36	25	16	$0,24\pm 0,03$	0.41	белый
E-FLEX GOLD-098	1504	15	04 ($4\pm 0,5$)	0,15	32	21	16	$0,27\pm 0,03$	0.40	белый
E-FLEX GOLD-099	1504	15	04 ($4\pm 0,5$)	0,15	42	31	16	$0,27\pm 0,03$	0.42	белый
E-FLEX GOLD-100	2004	20	04 ($4\pm 0,5$)	0,20	32	21	16	$0,32\pm 0,03$	0.42	желтый
E-FLEX GOLD-101	2004	20	04 ($4\pm 0,5$)	0,20	42	31	16	$0,32\pm 0,03$	0.44	желтый
E-FLEX GOLD-125	1902	19	02 ($2\pm 0,3$)	0,19	36	25	16	$0,25\pm 0,03$	0.40	желтый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX GOLD-126	2004	20	04 ($4 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,32 \pm 0,03$	0.43	желтый
E-FLEX GOLD-146	1902	19	02 ($2 \pm 0,3$)	0,19	42	31	16	$0,25 \pm 0,03$	0.41	желтый
E-FLEX GOLD-155	1302	13	02 ($2 \pm 0,3$)	0,13	36	25	16	$0,19 \pm 0,02$	0.40	фиолетовый
	1602	16	02 ($2 \pm 0,3$)	0,16	36	25	16	$0,22 \pm 0,02$	0.40	белый
	1902	19	02 ($2 \pm 0,3$)	0,19	36	25	16	$0,25 \pm 0,03$	0.40	желтый
	1503	15	03 ($3 \pm 0,3$)	0,15	36	25	16	$0,24 \pm 0,03$	0.41	белый
E-FLEX GOLD-159	1302	13	02 ($2 \pm 0,3$)	0,13	32	21	16	$0,19 \pm 0,02$	0.39	фиолетовый
	1602	16	02 ($2 \pm 0,3$)	0,16	32	21	16	$0,22 \pm 0,02$	0.39	белый
	1503	15	03 ($3 \pm 0,3$)	0,15	32	21	16	$0,24 \pm 0,03$	0.40	фиолетовый
E-FLEX GOLD-160	1302	13	02 ($2 \pm 0,3$)	0,13	42	31	16	$0,19 \pm 0,02$	0.41	белый
	1602	16	02 ($2 \pm 0,3$)	0,16	42	31	16	$0,22 \pm 0,02$	0.41	белый
	1503	15	03 ($3 \pm 0,3$)	0,15	42	31	16	$0,24 \pm 0,03$	0.42	белый
E-FLEX GOLD-175	1302	13	02 ($2 \pm 0,3$)	0,13	32	21	16	$0,19 \pm 0,02$	0.39	фиолетовый
	1602	16	02 ($2 \pm 0,3$)	0,16	32	21	16	$0,22 \pm 0,02$	0.39	белый
	1902	19	02 ($2 \pm 0,3$)	0,19	32	21	16	$0,24 \pm 0,03$	0.39	белый
E-FLEX GOLD-176	1302	13	02 ($2 \pm 0,3$)	0,13	36	25	16	$0,19 \pm 0,02$	0.40	фиолетовый
	1602	16	02 ($2 \pm 0,3$)	0,16	36	25	16	$0,22 \pm 0,02$	0.40	белый
	1902	19	02 ($2 \pm 0,3$)	0,19	36	25	16	$0,24 \pm 0,03$	0.40	желтый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_t	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX GOLD-177	1302	13	02 ($2\pm 0,3$)	0,13	32	21	16	$0,19\pm 0,02$	0.39	фиолетовый
E-FLEX GOLD-178	1602	16	02 ($2\pm 0,3$)	0,16	32	21	16	$0,22\pm 0,02$	0.39	белый
E-FLEX GOLD-179	1902	19	02 ($2\pm 0,3$)	0,19	32	21	16	$0,24\pm 0,03$	0.39	желтый
E-FLEX GOLD-249	1004	10	04 ($4\pm 0,5$)	0,10	36	25	16	$0,22\pm 0,02$	0.40	фиолетовый
E-FLEX GOLD-297	1203	12	03 ($3\pm 0,3$)	0,12	32	21	16	$0,21\pm 0,03$	0.39	фиолетовый
E-FLEX GOLD-298	1203	12	03 ($3\pm 0,3$)	0,12	36	25	16	$0,21\pm 0,03$	0.40	фиолетовый
E-FLEX S-093	1502v	15	02v ($2\pm 0,3$)	0,15	32	21	16	$0,21\pm 0,03$	0.43	белый
E-FLEX S-094	1502v	15	02v ($2\pm 0,3$)	0,15	36	25	16	$0,21\pm 0,03$	0.43	белый
E-FLEX S-095	1502v	15	02v ($2\pm 0,3$)	0,15	42	31	16	$0,21\pm 0,03$	0.43	белый
E-FLEX MINI-009	2004	20	04 ($4\pm 0,5$)	0,20	27	16	13	$0,32\pm 0,03$	0.41	желтый
E-FLEX GOLD-114	4502	45	02 ($2\pm 0,3$)	0,45	36	25	16	$0,51\pm 0,02$	0.40	белый
	5502	55	02 ($2\pm 0,3$)	0,55	36	25	16	$0,61\pm 0,02$	0.42	красный
	6502	65	02 ($2\pm 0,3$)	0,65	36	25	16	$0,71\pm 0,04$	0.44	синий
	7502	75	02 ($2\pm 0,3$)	0,75	36	25	16	$0,81\pm 0,04$	0.45	зеленый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_t	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
	8002	80	02 ($2\pm 0,3$)	0,80	36	25	16	$0,86\pm 0,04$	0.46	черный
E-FLEX GOLD-115	4502	45	02 ($2\pm 0,3$)	0,45	42	31	16	$0,51\pm 0,02$	0.41	белый
	5502	55	02 ($2\pm 0,3$)	0,55	42	31	16	$0,61\pm 0,02$	0.43	красный
	6502	65	02 ($2\pm 0,3$)	0,65	42	31	16	$0,71\pm 0,04$	0.45	синий
	7502	75	02 ($2\pm 0,3$)	0,75	42	31	16	$0,81\pm 0,04$	0.46	зеленый
	8002	80	02 ($2\pm 0,3$)	0,80	42	31	16	$0,86\pm 0,04$	0.47	черный
E-FLEX GOLD-309	7002	70	02 ($2\pm 0,3$)	0,70	36	25	16	$0,76\pm 0,04$	0.44	зеленый
E-FLEX BLUE-305	4502	45	02 ($2\pm 0,3$)	0,45	36	25	16	$0,51\pm 0,02$	0.40	белый
	5002	50	02 ($2\pm 0,3$)	0,50	36	25	16	$0,56\pm 0,02$	0.41	желтый
	5502	55	02 ($2\pm 0,3$)	0,55	36	25	16	$0,61\pm 0,02$	0.42	красный
	6002	60	02 ($2\pm 0,3$)	0,60	36	25	16	$0,66\pm 0,04$	0.43	синий
	7002	70	02 ($2\pm 0,3$)	0,70	36	25	16	$0,76\pm 0,04$	0.44	зеленый
	8002	80	02 ($2\pm 0,3$)	0,80	36	25	16	$0,86\pm 0,04$	0.46	черный
E-FLEX GOLD-310	8002	80	02 ($2\pm 0,3$)	0,80	42	31	16	$0,86\pm 0,04$	0.47	черный

Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eightecth», тип Н-файл

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм (±0,5 мм)	Длина оперативной части, мм (±0,5 мм) L ₁	Длина режущей части, мм (±0,5 мм) L _н	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d ₃	Масса, г (±0,05 г)	Обозначение цвета
E-FLEX ONE-001	2004	20	04 (4±0,5)	0,20	32	21	16	0,32±0,03	0.42	желтый
E-FLEX ONE-019	2004	20	04 (4±0,5)	0,20	36	25	16	0,32±0,03	0.43	желтый
	2504	25	04 (4±0,5)	0,25	36	25	16	0,37±0,03	0.43	красный
	3504	35	04 (4±0,5)	0,35	36	25	16	0,47±0,03	0.42	зеленый
E-FLEX ONE-020	2006	20	06 (6±0,5)	0,20	36	25	16	0,38±0,03	0.41	желтый
	2506	25	06 (6±0,5)	0,25	36	25	16	0,43±0,03	0.43	красный
	3506	35	06 (6±0,5)	0,35	36	25	16	0,53±0,03	0.45	зеленый
E-FLEX ONE-021	2004	20	04 (4±0,5)	0,20	32	21	16	0,32±0,03	0.42	желтый
	2504	25	04 (4±0,5)	0,25	32	21	16	0,37±0,03	0.42	красный
	3504	35	04 (4±0,5)	0,35	32	21	16	0,47±0,03	0.41	зеленый
E-FLEX ONE-022	2006	20	06 (6±0,5)	0,20	32	21	16	0,38±0,03	0.40	желтый
	2506	25	06 (6±0,5)	0,25	32	21	16	0,43±0,03	0.42	красный
	3506	35	06 (6±0,5)	0,35	32	21	16	0,53±0,03	0.44	зеленый
E-FLEX ONE-026	1004	10	04 (4±0,5)	0,10	36	25	16	0,22±0,02	0.40	фиолетовый
E-FLEX ONE-027	1504	15	04 (4±0,5)	0,15	36	25	16	0,27±0,03	0.41	белый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX ONE-028	2004	20	04 (4 $\pm 0,5$)	0,20	36	25	16	0,32 $\pm 0,03$	0.43	желтый
	2504	25	04 (4 $\pm 0,5$)	0,25	36	25	16	0,37 $\pm 0,03$	0.43	красный
	3504	35	04 (4 $\pm 0,5$)	0,35	36	25	16	0,47 $\pm 0,03$	0.42	зеленый
	4004	40	04 (4 $\pm 0,5$)	0,40	36	25	16	0,52 $\pm 0,03$	0.44	черный
E-FLEX ONE-031	2004	20	04 (4 $\pm 0,5$)	0,20	42	31	16	0,32 $\pm 0,03$	0.44	желтый
	2504	25	04 (4 $\pm 0,5$)	0,25	42	31	16	0,37 $\pm 0,03$	0.44	красный
	3504	35	04 (4 $\pm 0,5$)	0,35	42	31	16	0,47 $\pm 0,03$	0.43	зеленый
E-FLEX ONE-034	2006	20	06 (6 $\pm 0,5$)	0,20	42	31	16	0,38 $\pm 0,03$	0.42	желтый
	2506	25	06 (6 $\pm 0,5$)	0,25	42	31	16	0,43 $\pm 0,03$	0.42	красный
	3506	35	06 (6 $\pm 0,5$)	0,35	42	31	16	0,53 $\pm 0,03$	0.46	зеленый
E-FLEX ONE-035	2504	25	04 (4 $\pm 0,5$)	0,25	32	21	16	0,37 $\pm 0,03$	0.42	красный
E-FLEX ONE-037	1504	15	04 (4 $\pm 0,5$)	0,15	36	25	16	0,27 $\pm 0,03$	0.41	белый
E-FLEX ONE-038	2006	20	06 (6 $\pm 0,5$)	0,20	36	25	16	0,38 $\pm 0,03$	0.41	желтый
E-FLEX ONE-039	2504	25	04 (4 $\pm 0,5$)	0,25	36	25	16	0,37 $\pm 0,03$	0.43	красный
E-FLEX ONE-041	1004	10	04 (4 $\pm 0,5$)	0,10	36	25	16	0,22 $\pm 0,02$	0.40	фиолетовый
	1504	15	04 (4 $\pm 0,5$)	0,15	36	25	16	0,27 $\pm 0,03$	0.41	белый
	2004	20	04 (4 $\pm 0,5$)	0,20	36	25	16	0,32 $\pm 0,03$	0.43	желтый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX ONE-042	1004	10	04 ($4 \pm 0,5$)	0,10	32	21	16	$0,22 \pm 0,02$	0.39	фиолетовый
	1504	15	04 ($4 \pm 0,5$)	0,15	32	21	16	$0,27 \pm 0,03$	0.40	белый
	2004	20	04 ($4 \pm 0,5$)	0,20	32	21	16	$0,32 \pm 0,03$	0.42	желтый
E-FLEX ONE-043	1004	10	04 ($4 \pm 0,5$)	0,10	42	31	16	$0,22 \pm 0,02$	0.41	фиолетовый
	1504	15	04 ($4 \pm 0,5$)	0,15	42	31	16	$0,27 \pm 0,03$	0.42	белый
	2004	20	04 ($4 \pm 0,5$)	0,20	42	31	16	$0,32 \pm 0,03$	0.44	желтый
E-FLEX ONE-054	2004	20	04 ($4 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,32 \pm 0,03$	0.43	желтый
	2504	25	04 ($4 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,37 \pm 0,03$	0.43	красный
	3504	35	04 ($4 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,47 \pm 0,03$	0.42	зеленый
E-FLEX ONE-055	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,38 \pm 0,03$	0.41	желтый
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,43 \pm 0,03$	0.43	красный
	3506	35	06 ($6 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,53 \pm 0,03$	0.45	зеленый
E-FLEX EDGE-001	2004	20	04 ($4 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,32 \pm 0,03$	0.43	желтый
	2504	25	04 ($4 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,37 \pm 0,03$	0.43	красный
	3504	35	04 ($4 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,47 \pm 0,03$	0.42	зеленый
E-FLEX EDGE-006	1604	16	04 ($4 \pm 0,5$)	0,16	36	25	16	$0,28 \pm 0,03$	0.40	белый
	2504	25	04 ($4 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,37 \pm 0,03$	0.43	красный
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,43 \pm 0,03$	0.43	красный
	3504	35	04 ($4 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,47 \pm 0,03$	0.42	зеленый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX EDGE-013	1504	15	04 ($4 \pm 0,5$)	0,15	36	25	16	$0,27 \pm 0,03$	0.41	белый
	2504	25	04 ($4 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,37 \pm 0,03$	0.43	красный
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,47 \pm 0,03$	0.43	красный
	3504	35	04 ($4 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,47 \pm 0,03$	0.42	зеленый
E-FLEX EDGE-014	1504	15	04 ($4 \pm 0,5$)	0,15	36	25	16	$0,27 \pm 0,03$	0.41	белый
	2004	25	04 ($4 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,37 \pm 0,03$	0.43	желтый
	2504	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,47 \pm 0,03$	0.43	красный
	3504	35	04 ($4 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,47 \pm 0,03$	0.42	зеленый
E-FLEX EDGE-017	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	32	21	16	$0,38 \pm 0,03$	0.40	желтый
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	32	21	16	$0,43 \pm 0,03$	0.42	красный
	3506	35	06 ($6 \pm 0,5$)	0,35	32	21	16	$0,53 \pm 0,03$	0.44	зеленый
E-FLEX EDGE-019	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	42	31	16	$0,38 \pm 0,03$	0.42	желтый
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	42	31	16	$0,43 \pm 0,03$	0.42	красный
	3506	35	06 ($6 \pm 0,5$)	0,35	42	31	16	$0,53 \pm 0,03$	0.46	зеленый
E-FLEX EDGE-021	3504	35	04 ($4 \pm 0,5$)	0,35	32	21	16	$0,47 \pm 0,03$	0.41	зеленый
E-FLEX EDGE-023	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	32	21	16	$0,43 \pm 0,03$	0.42	красный
E-FLEX EDGE-025	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	32	21	16	$0,38 \pm 0,03$	0.40	желтый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX EDGE-027	3506	35	06 ($6 \pm 0,5$)	0,35	32	21	16	$0,53 \pm 0,03$	0.44	зеленый
E-FLEX EDGE-036	1504	15	04 ($4 \pm 0,5$)	0,15	36	25	16	$0,27 \pm 0,03$	0.41	белый
	2504	25	04 ($4 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,37 \pm 0,03$	0.43	красный
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,43 \pm 0,03$	0.43	красный
	3504	35	04 ($4 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,47 \pm 0,03$	0.42	зеленый
E-FLEX EDGE-037	1504	15	04 ($4 \pm 0,5$)	0,15	42	31	16	$0,27 \pm 0,03$	0.42	белый
	2504	25	04 ($4 \pm 0,5$)	0,25	42	31	16	$0,37 \pm 0,03$	0.44	красный
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	42	31	16	$0,43 \pm 0,03$	0.42	красный
	3504	35	04 ($4 \pm 0,5$)	0,35	42	31	16	$0,47 \pm 0,03$	0.43	зеленый
E-FLEX EDGE-038	2004	20	04 ($4 \pm 0,5$)	0,20	42	31	16	$0,37 \pm 0,03$	0.44	желтый
E-FLEX EDGE-039	2504	25	04 ($4 \pm 0,5$)	0,25	42	31	16	$0,37 \pm 0,03$	0.44	красный
E-FLEX EDGE-040	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,38 \pm 0,03$	0.41	желтый
E-FLEX EDGE-041	3506	35	06 ($6 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,53 \pm 0,03$	0.45	зеленый
E-FLEX EDGE-090	4504	45	04 ($4 \pm 0,5$)	0,45	32	21	16	$0,57 \pm 0,03$	0.43	белый
E-FLEX EDGE-091	4504	45	04 ($4 \pm 0,5$)	0,45	36	25	16	$0,57 \pm 0,03$	0.44	белый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX EDGE-092	5504	55	04 (4 $\pm$ 0,5)	0,55	32	21	16	0,67 $\pm$ 0,03	0.45	красный
E-FLEX EDGE-093	5504	55	04 (4 $\pm$ 0,5)	0,55	36	25	16	0,67 $\pm$ 0,03	0.46	красный
E-FLEX EDGE-136	2004	20	04 (4 $\pm$ 0,5)	0,20	36	25	16	0,37 $\pm$ 0,03	0.43	желтый
	2504	25	04 (4 $\pm$ 0,5)	0,25	36	25	16	0,37 $\pm$ 0,03	0.43	красный
	3004	30	04 (4 $\pm$ 0,5)	0,30	36	25	16	0,42 $\pm$ 0,03	0.43	синий
	3504	35	04 (4 $\pm$ 0,5)	0,35	36	25	16	0,47 $\pm$ 0,03	0.42	зеленый
	4504	45	04 (4 $\pm$ 0,5)	0,45	36	25	16	0,57 $\pm$ 0,03	0.44	белый
	5504	55	04 (4 $\pm$ 0,5)	0,55	36	25	16	0,67 $\pm$ 0,03	0.46	красный
E-FLEX EDGE-141	3006	30	06 (6 $\pm$ 0,5)	0,30	36	25	16	0,48 $\pm$ 0,03	0.45	синий
E-FLEX EDGE-142	1504	15	04 (4 $\pm$ 0,5)	0,15	42	31	16	0,27 $\pm$ 0,03	0.42	белый
	2004	20	04 (4 $\pm$ 0,5)	0,20	42	31	16	0,32 $\pm$ 0,03	0.44	желтый
	2504	25	04 (4 $\pm$ 0,5)	0,25	42	31	16	0,37 $\pm$ 0,03	0.44	красный
	3504	35	04 (4 $\pm$ 0,5)	0,35	42	31	16	0,47 $\pm$ 0,03	0.43	зеленый
E-FLEX EDGE-143	3004	30	04 (4 $\pm$ 0,5)	0,30	36	25	16	0,42 $\pm$ 0,03	0.43	синий
E-FLEX REC-001	2004	20	04 (4 $\pm$ 0,5)	0,20	32	21	16	0,32 $\pm$ 0,03	0.42	желтый
E-FLEX REC-003	3504	35	04 (4 $\pm$ 0,5)	0,35	32	21	16	0,47 $\pm$ 0,03	0.41	зеленый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX REC-004	4004	40	04 ($4 \pm 0,5$)	0,40	32	21	16	$0,52 \pm 0,03$	0.43	черный
E-FLEX REC-014	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	32	21	16	$0,43 \pm 0,03$	0.42	красный
E-FLEX REC-015	3506	35	06 ($6 \pm 0,5$)	0,35	32	21	16	$0,53 \pm 0,03$	0.44	красный
E-FLEX REC-019	3506	35	06 ($6 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,53 \pm 0,03$	0.45	желтый
E-FLEX REC-025	2004	20	04 ($4 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,32 \pm 0,03$	0.43	желтый
	2504	25	04 ($4 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,37 \pm 0,03$	0.43	красный
	3504	35	04 ($4 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,47 \pm 0,03$	0.42	зеленый
	4004	40	04 ($4 \pm 0,5$)	0,40	36	25	16	$0,52 \pm 0,03$	0.44	черный
E-FLEX REC-026	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,38 \pm 0,03$	0.41	желтый
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,43 \pm 0,03$	0.43	красный
	3506	35	06 ($6 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,53 \pm 0,03$	0.45	зеленый
	4006	40	06 ($6 \pm 0,5$)	0,40	36	25	16	$0,58 \pm 0,03$	0.47	черный
E-FLEX REC-027	2004	20	04 ($4 \pm 0,5$)	0,20	32	21	16	$0,32 \pm 0,03$	0.42	желтый
	2504	25	04 ($4 \pm 0,5$)	0,25	32	21	16	$0,37 \pm 0,03$	0.42	красный
	3504	35	04 ($4 \pm 0,5$)	0,35	32	21	16	$0,47 \pm 0,03$	0.41	зеленый
	4004	40	04 ($4 \pm 0,5$)	0,40	32	21	16	$0,52 \pm 0,03$	0.43	черный
E-FLEX REC-045	2004	20	04 ($4 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,32 \pm 0,03$	0.43	желтый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
	2504	25	04 (4 $\pm 0,5$)	0,25	36	25	16	0,37 $\pm 0,03$	0.43	красный
	3504	35	04 (4 $\pm 0,5$)	0,35	36	25	16	0,47 $\pm 0,03$	0.42	зеленый
E-FLEX REC-046	2006	20	06 (6 $\pm 0,5$)	0,20	32	21	16	0,38 $\pm 0,03$	0.40	желтый
	2506	25	06 (6 $\pm 0,5$)	0,25	32	21	16	0,43 $\pm 0,03$	0.42	красный
	3506	35	06 (6 $\pm 0,5$)	0,35	32	21	16	0,53 $\pm 0,03$	0.44	зеленый
	4006	40	06 (6 $\pm 0,5$)	0,40	32	21	16	0,58 $\pm 0,03$	0.46	черный
E-FLEX REC-048	2004	20	04 (4 $\pm 0,5$)	0,20	39	28	16	0,32 $\pm 0,03$	0.43	желтый
	2504	25	04 (4 $\pm 0,5$)	0,25	39	28	16	0,37 $\pm 0,03$	0.43	красный
	3504	35	04 (4 $\pm 0,5$)	0,35	39	28	16	0,47 $\pm 0,03$	0.42	зеленый
	4004	40	04 (4 $\pm 0,5$)	0,40	39	28	16	0,52 $\pm 0,03$	0.44	черный
E-FLEX REC-049	2004	20	04 (4 $\pm 0,5$)	0,20	42	31	16	0,32 $\pm 0,03$	0.44	желтый
	2504	25	04 (4 $\pm 0,5$)	0,25	42	31	16	0,37 $\pm 0,03$	0.44	красный
	3504	35	04 (4 $\pm 0,5$)	0,35	42	31	16	0,47 $\pm 0,03$	0.43	зеленый
	4004	40	04 (4 $\pm 0,5$)	0,40	42	31	16	0,52 $\pm 0,03$	0.45	черный
E-FLEX REC-053	2006	20	06 (6 $\pm 0,5$)	0,20	42	31	16	0,38 $\pm 0,03$	0.42	желтый
	2506	25	06 (6 $\pm 0,5$)	0,25	42	31	16	0,43 $\pm 0,03$	0.42	красный
	3506	35	06 (6 $\pm 0,5$)	0,35	42	31	16	0,53 $\pm 0,03$	0.46	зеленый
	4006	40	06 (6 $\pm 0,5$)	0,40	42	31	16	0,58 $\pm 0,03$	0.48	черный
E-FLEX REC-056	2506	25	06 (6 $\pm 0,5$)	0,25	42	31	16	0,43 $\pm 0,03$	0.42	красный

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_t	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX REC-061	2504	25	04 ($4 \pm 0,5$)	0,25	32	21	16	$0,37 \pm 0,03$	0.42	красный
E-FLEX REC-062	2004	20	04 ($4 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,32 \pm 0,03$	0.43	желтый
	2504	25	04 ($4 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,37 \pm 0,03$	0.43	красный
	3504	35	04 ($4 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,47 \pm 0,03$	0.42	зеленый
	4004	40	04 ($4 \pm 0,5$)	0,40	36	25	16	$0,52 \pm 0,03$	0.44	черный
E-FLEX REC-063	2004	20	04 ($4 \pm 0,5$)	0,20	32	21	16	$0,32 \pm 0,03$	0.42	желтый
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	32	21	16	$0,43 \pm 0,03$	0.42	красный
E-FLEX REC-068	2004	20	04 ($4 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,32 \pm 0,03$	0.43	желтый
	2504	25	04 ($4 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,37 \pm 0,03$	0.43	красный
	3504	35	04 ($4 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,47 \pm 0,03$	0.42	зеленый
	4004	40	04 ($4 \pm 0,5$)	0,40	36	25	16	$0,52 \pm 0,03$	0.44	черный
E-FLEX REC-069	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,38 \pm 0,03$	0.41	желтый
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,43 \pm 0,03$	0.43	красный
	3506	35	06 ($6 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,53 \pm 0,03$	0.45	зеленый
	4006	40	06 ($6 \pm 0,5$)	0,40	36	25	16	$0,58 \pm 0,03$	0.47	черный
E-FLEX REC-070	2004	20	04 ($4 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,32 \pm 0,03$	0.43	желтый
	2504	25	04 ($4 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,37 \pm 0,03$	0.43	красный
	3504	35	04 ($4 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,47 \pm 0,03$	0.42	зеленый
	4004	40	04 ($4 \pm 0,5$)	0,40	36	25	16	$0,52 \pm 0,03$	0.44	черный



Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_t	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX REC-071	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,38 \pm 0,03$	0.41	желтый
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,43 \pm 0,03$	0.43	красный
	3506	35	06 ($6 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,53 \pm 0,03$	0.45	зеленый
	4006	40	06 ($6 \pm 0,5$)	0,40	36	25	16	$0,58 \pm 0,03$	0.47	черный
E-FLEX REC-080	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,38 \pm 0,03$	0.41	желтый
	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,43 \pm 0,03$	0.43	красный
	3506	35	06 ($6 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,53 \pm 0,03$	0.45	зеленый
E-FLEX REC-081	2004	20	04 ($4 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,32 \pm 0,03$	0.43	желтый
E-FLEX REC-082	2006	20	06 ($6 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,38 \pm 0,03$	0.41	желтый
E-FLEX REC-083	2504	25	04 ($4 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,37 \pm 0,03$	0.43	красный
E-FLEX REC-084	2506	25	06 ($6 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,43 \pm 0,03$	0.43	красный
E-FLEX REC-085	3504	35	04 ($4 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,47 \pm 0,03$	0.42	зеленый
E-FLEX REC-086	4004	40	04 ($4 \pm 0,5$)	0,40	36	25	16	$0,52 \pm 0,03$	0.44	черный
E-FLEX REC-087	4004	40	04 ($4 \pm 0,5$)	0,40	36	25	16	$0,52 \pm 0,03$	0.44	черный
E-FLEX REC-088	3504	35	04 ($4 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,47 \pm 0,03$	0.42	зеленый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_t	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX REC-089	2004	20	04 (4 $\pm 0,5$)	0,20	36	25	16	0,32 $\pm 0,03$	0.43	желтый
E-FLEX REC-090	2504	25	04 (4 $\pm 0,5$)	0,25	36	25	16	0,37 $\pm 0,03$	0.43	красный
E-FLEX REC-091	2006	20	06 (6 $\pm 0,5$)	0,20	36	25	16	0,38 $\pm 0,03$	0.41	желтый
E-FLEX REC-092	2506	25	06 (6 $\pm 0,5$)	0,25	36	25	16	0,43 $\pm 0,03$	0.43	красный
E-FLEX REC-093	2005	20	05 (5 $\pm 0,5$)	0,20	32	21	16	0,35 $\pm 0,03$	0.42	желтый
E-FLEX REC-094	2005	20	05 (5 $\pm 0,5$)	0,20	36	25	16	0,35 $\pm 0,03$	0.43	желтый
E-FLEX REC-095	2005	20	05 (5 $\pm 0,5$)	0,20	42	31	16	0,35 $\pm 0,03$	0.44	желтый
E-FLEX REC-096	2505	25	05 (5 $\pm 0,5$)	0,25	32	21	16	0,40 $\pm 0,03$	0.42	красный
E-FLEX REC-097	2505	25	05 (5 $\pm 0,5$)	0,25	36	25	16	0,40 $\pm 0,03$	0.43	красный
E-FLEX REC-098	2505	25	05 (5 $\pm 0,5$)	0,25	42	31	16	0,40 $\pm 0,03$	0.44	красный
E-FLEX REC-099	3505	35	05 (5 $\pm 0,5$)	0,35	32	21	16	0,50 $\pm 0,03$	0.42	зеленый
E-FLEX REC-100	3505	35	05 (5 $\pm 0,5$)	0,35	36	25	16	0,50 $\pm 0,03$	0.43	зеленый
E-FLEX REC-101	3505	35	05 (5 $\pm 0,5$)	0,35	42	31	16	0,50 $\pm 0,03$	0.44	зеленый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_t	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
E-FLEX REC-102	4505	45	05 ($5 \pm 0,5$)	0,45	32	21	16	$0,60 \pm 0,03$	0.46	белый
E-FLEX REC-103	4505	45	05 ($5 \pm 0,5$)	0,45	36	25	16	$0,60 \pm 0,03$	0.47	белый
E-FLEX REC-104	4505	45	05 ($5 \pm 0,5$)	0,45	42	31	16	$0,60 \pm 0,03$	0.48	белый
E-FLEX REC-105	2005	20	05 ($5 \pm 0,5$)	0,20	32	21	16	$0,35 \pm 0,03$	0.42	желтый
	2505	25	05 ($5 \pm 0,5$)	0,25	32	21	16	$0,40 \pm 0,03$	0.42	красный
	3505	35	05 ($5 \pm 0,5$)	0,35	32	21	16	$0,50 \pm 0,03$	0.42	зеленый
	4505	45	05 ($5 \pm 0,5$)	0,45	32	21	16	$0,60 \pm 0,03$	0.46	белый
E-FLEX REC-106	2005	20	05 ($5 \pm 0,5$)	0,20	36	25	16	$0,35 \pm 0,03$	0.43	желтый
	2505	25	05 ($5 \pm 0,5$)	0,25	36	25	16	$0,40 \pm 0,03$	0.43	красный
	3505	35	05 ($5 \pm 0,5$)	0,35	36	25	16	$0,50 \pm 0,03$	0.43	зеленый
	4505	45	05 ($5 \pm 0,5$)	0,45	36	25	16	$0,60 \pm 0,03$	0.47	белый
E-FLEX REC-107	2005	20	05 ($5 \pm 0,5$)	0,20	42	31	16	$0,35 \pm 0,03$	0.44	желтый
	2505	25	05 ($5 \pm 0,5$)	0,25	42	31	16	$0,40 \pm 0,03$	0.44	красный
	3505	35	05 ($5 \pm 0,5$)	0,35	42	31	16	$0,50 \pm 0,03$	0.44	зеленый
	4505	45	05 ($5 \pm 0,5$)	0,45	42	31	16	$0,60 \pm 0,03$	0.48	белый
E-FLEX ONE-057	4504	45	04 ($4 \pm 0,5$)	0,45	36	25	16	$0,57 \pm 0,03$	0.44	белый
	5004	50	04 ($4 \pm 0,5$)	0,50	36	25	16	$0,62 \pm 0,03$	0.45	белый
	5504	55	04 ($4 \pm 0,5$)	0,55	36	25	16	$0,67 \pm 0,03$	0.46	желтый

Вариант исполнения	Обозначение размера	Номинальный размер	Конусность, % α Обозначение на маркировке (фактическое значение с допуском)	Начальный диаметр рабочей части, мм (-0,02 мм) D	Общая длина вместе с хвостовиком, мм ($\pm 0,5$ мм)	Длина оперативной части, мм ($\pm 0,5$ мм) L_1	Длина режущей части, мм ($\pm 0,5$ мм) l_n	Диаметр на расстоянии 3 мм от конца, мм d_3	Масса, г ($\pm 0,05$ г)	Обозначение цвета
	6004	60	04 ($4 \pm 0,5$)	0,60	36	25	16	$0,72 \pm 0,03$	0.47	красный
	7004	70	04 ($4 \pm 0,5$)	0,70	36	25	16	$0,82 \pm 0,04$	0.52	синий
	8004	80	04 ($4 \pm 0,5$)	0,80	36	25	16	$0,92 \pm 0,04$	0.59	зеленый
E-FLEX EDGE-156	4504	45	04 ($4 \pm 0,5$)	0,45	36	25	16	$0,57 \pm 0,03$	0.44	белый
	5004	50	04 ($4 \pm 0,5$)	0,50	36	25	16	$0,62 \pm 0,03$	0.45	желтый
	5504	55	04 ($4 \pm 0,5$)	0,55	36	25	16	$0,67 \pm 0,03$	0.46	красный
	6004	60	04 ($4 \pm 0,5$)	0,60	36	25	16	$0,72 \pm 0,03$	0.47	синий
	7004	70	04 ($4 \pm 0,5$)	0,70	36	25	16	$0,82 \pm 0,04$	0.52	зеленый
	8004	80	04 ($4 \pm 0,5$)	0,80	36	25	16	$0,92 \pm 0,04$	0.50	черный

Счетчик использования инструмента

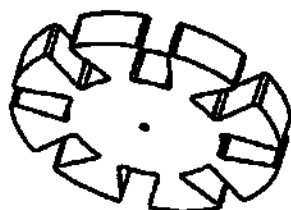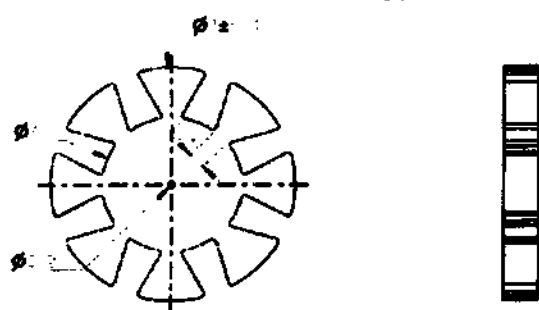

4 : 1

нет острых углов.

диаметр $7 \pm 0,4$ мм, толщина $1 \pm 0,2$ мм.

Требования к изготовлению

Инструменты должны быть плоскими, гладкими и симметричными. Не должно быть заусенцев, трещин, ржавчины, пятен и прочих дефектов.


Кодировка цвета должна быть на хвостовике, а на инструмент нанесена кольцевая маркировка.

Хвостовик должен быть 1 типа по ISO 1797, и должен быть пригоден для работы с наконечниками при максимальной скорости вращения инструмента.

Хвостовик инструментов машинных по размеру, цилиндричности, шероховатости поверхности должен соответствовать ISO 1797.

Размеры Хвостовика должны соответствовать:

Размеры в миллиметрах

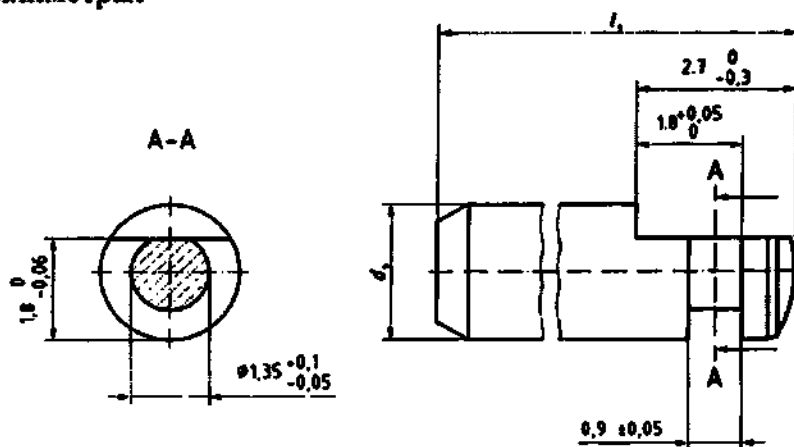

Диаметр хвостовика ds	Длина (минимум) ls
2,35 + 0/-0,03	11

Соединение хвостовика с рабочей частью должно быть надёжным и прочным.

Осевое смещение хвостовика от рабочей части не должно превышать 0,02 мм, после приложения осевой силы 20 Н. В пределах изгибающего момента 70 мН·м, рабочая часть не должна скользить относительно хвостовика.

При тепловом воздействии на инструмент при санитарной обработке не должна обнаруживаться деформация или изменение цвета, какие-либо признаки ухудшения качества.

Механические и химические требования должны быть:

Прочность на изгиб

Диаметр инструмента в месте испытания, d_3 , мм	Изгибающий момент мН·м (г*см), не более	
Инструмент	К-файл и К-дрельбор	Н-файл
$0.124 \leq d_3 < 0.164$	2.45 (24,5)	1.96 (19,6)
$0.164 \leq d_3 < 0.214$	4.91 (49,1)	3.43 (34,3)
$0.214 \leq d_3 < 0.264$	7.85 (78,5)	6.37 (63,7)
$0.264 \leq d_3 < 0.314$	11.78 (117,8)	9.80 (98,0)
$0.314 \leq d_3 < 0.364$	14.72 (147,2)	13.23 (132,3)
$0.364 \leq d_3 < 0.414$	18.65 (186,5)	16.66 (166,6)
$0.414 \leq d_3 < 0.464$	24.53 (245,3)	21.59 (215,9)
$0.464 \leq d_3 < 0.514$	35.33 (353,3)	31.36 (313,6)
$0.514 \leq d_3 < 0.564$	40.24 (402,4)	50.96 (509,6)
$d_3 \geq 0.564$	57.30 (573,0)	53.50 (535,0)

Устойчивость к изломам при скручивании и угловому смещению

Диаметр инструмента в месте испытания, d_3 мм	Сопротивление разрыву (изгибающий момент) мН·м (г*см), не менее		Угловой прогиб °, минимум	
Инструмент	К-файл	К-дрельбор и Н-файл	К-файл и К-дрельбор	Н-файл
$0.124 \leq d_3 < 0.164$	0.60 (6,0)	0.60 (6,0)	360	180
$0.164 \leq d_3 < 0.214$	0.80 (8,0)	0.80 (8,0)		
$0.214 \leq d_3 < 0.264$	1.77 (17,7)	1.18 (11,8)		
$0.264 \leq d_3 < 0.314$	2.94 (29,4)	1.96 (19,6)		
$0.314 \leq d_3 < 0.364$	4.42 (44,2)	3.43 (34,3)		
$0.364 \leq d_3 < 0.414$	6.38 (63,8)	4.91 (49,1)		
$0.414 \leq d_3 < 0.464$	9.81 (98,1)	6.87 (68,7)		120
$0.464 \leq d_3 < 0.514$	0.60 (6,0)	0.60 (6,0)		
$0.514 \leq d_3 < 0.564$	0.80 (8,0)	0.80 (8,0)		
$d_3 \geq 0.564$	1.77 (17,7)	1.18 (11,8)		90

Инструмент многоразовый, при каждом последующем применении необходима стерилизация.

Рекомендуемый способ стерилизации: стерилизация паровым методом под давлением $0,20 \pm 0,02$ МПа, температурой $132 \pm 2^\circ\text{C}$, время выдержки не менее 5 минут.

Инструменты должны быть устойчивы к предстерилизационной очистке ручным или механическим (в ультразвуковой ванне).

Средний ресурс инструмента до списания должен быть не менее 8 циклов санитарной обработки.

14. МАТЕРИАЛЫ

Часть изделия	Материал
Рабочая часть	Никель-титановый сплав (NiTi)
Хвостовик	Медный сплав HBi59-1.5
Ограничитель, счетчик использования инструмента	СИЛИКОНОВЫЙ КАУЧУК ZY-850A

Сведения о красителях ограничителя:

- средне-желтый 924
- алый 932
- пурпурный 936
- бриллиантовый синий 956
- травянисто-зеленый 962
- белый 970
- черный 980

Сведения о красителях счетчика использования инструмента:

- средне-желтый 924

Сведения о красителях кодировки цвета на хвостовике и на инструменте:

- средне-желтый 924
- алый 932
- пурпурный 936
- бриллиантовый синий 956
- травянисто-зеленый 962
- белый 970
- черный 980

15. КОМПЛЕКТНОСТЬ


Комплектность поставки:

- Инструмент одного варианта исполнения.
- Счетчик использования инструмента в соответствии с количеством инструментов.
- Инструкция по применению, вложенная в транспортную упаковку в количестве 1 шт.

16. МАРКИРОВКА

Маркировка производителя

Маркировка первичной упаковки

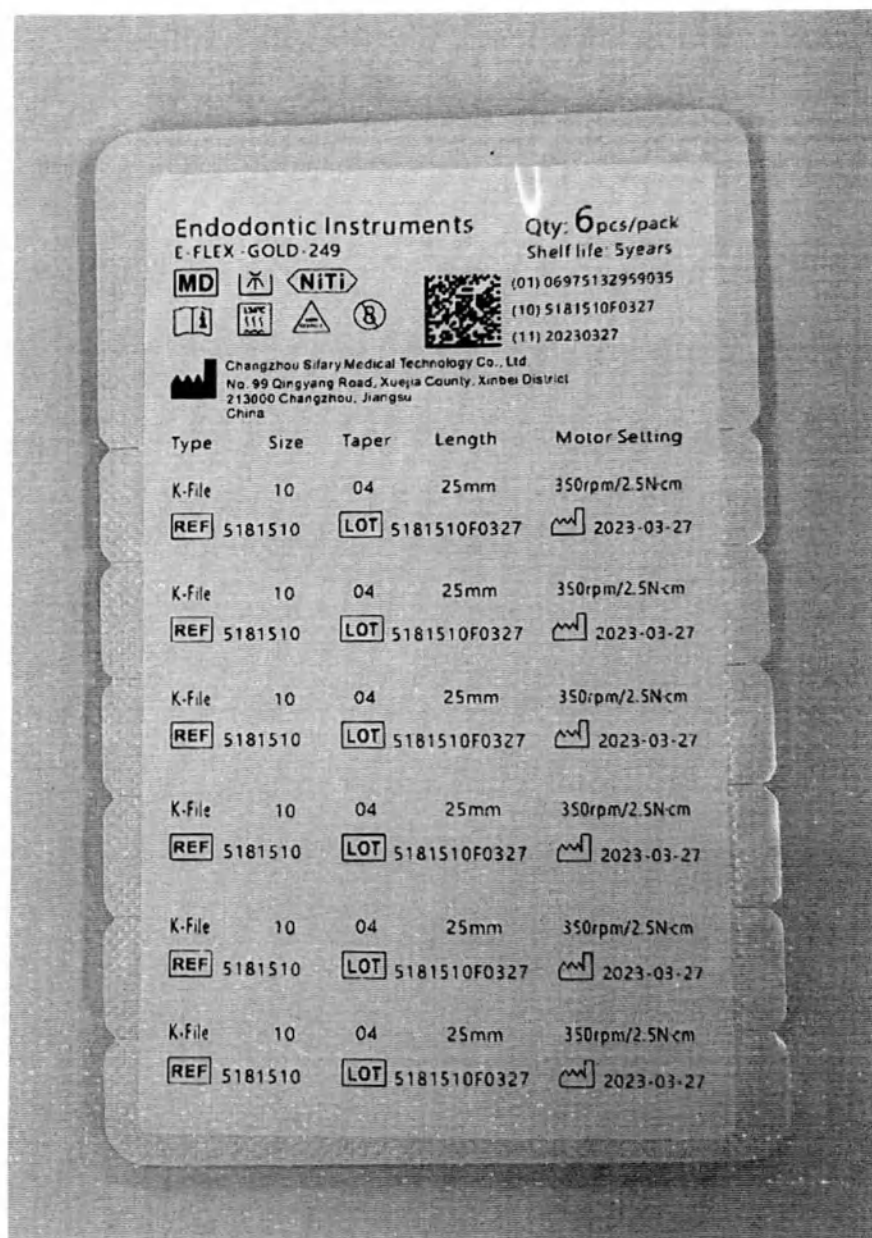

Перевод:

Эндодонтические инструменты

Тип Размер Конусность Длина Параметры мотора

Количество штук

Срок хранения

Чанчжоу Сифари Медикал Технолоджи Ко. Лтд., 99, Цинъян Роуд, уезд Сюэцзя, округ Синьбэй, город Чанчжоу, 213000, провинция Цзянсу, Китай

-Маркировка групповой упаковки



Перевод:

Эндодонтические инструменты

Тип Размер Конусность Длина Параметры мотора

Количество штук

Срок хранения

Максимальное количество применений

Чанчжоу Сифари Медикал Технолоджи Ко. Лтд., 99, Цинъян Роуд, уезд Сюэцзя, округ Синьбэй,
город Чанчжоу, 213000, провинция Цзянсу, Китай

Эндодонтические инструменты

-Маркировка транспортной упаковки




Перевод:

Эндодонтические инструменты

Количество штук

Срок хранения

Чанчжоу Сифари Медикал Технолоджи Ко. Лтд., 99, Цинъян Роуд, уезд Сюэцзя, округ Синьбэй,
город Чанчжоу, 213000, провинция Цзянсу, Китай

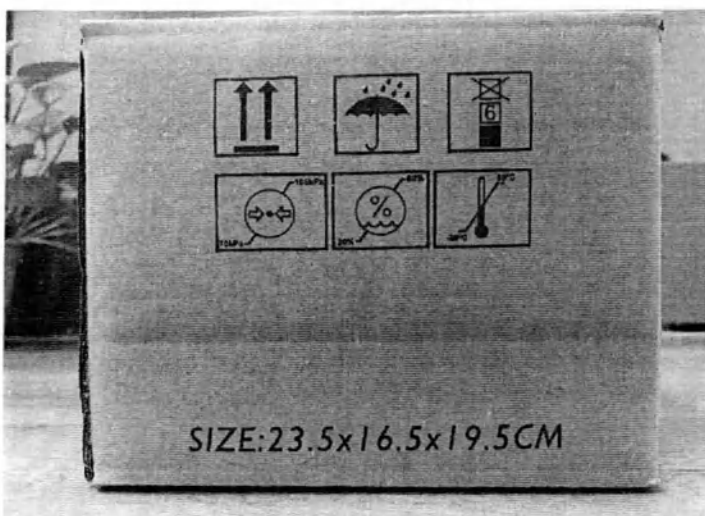

Дополнительная маркировка для поставки в РФ

Маркировка групповой упаковки на примере варианта исполнения Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-дрильбор, E-FLEX GOLD-169: размер 2504, длина 21 мм -6 шт./ блистер.

Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth»:

Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth», тип К-файл, E-FLEX GOLD-101-6 шт./ блистер, в составе:

- размер 2004, длина 31 мм – 6 шт.

-счетчик использования инструмента – 6 шт.

Кол-во блистеров:



Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd, No.99, Qingyang Road, Xuejia County, Xinbei District, Changzhou City, 213000, Jiangsu, P.R. China

Уполномоченный представитель: ООО «ДЕНТАЛВОРКШОП», Россия, 129626, г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный округ Алексеевский, ул. Новоалексеевская, д.22, к.2, помещ.ПБ, ком.27, 28, 29, 30А

РУ № _____ от ____.

Маркировка транспортной упаковки

Инструмент эндодонтический машинный нестерильный для обработки корневых каналов «Eighteeth»

Кол-во уп.:



Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd, No.99, Qingyang Road, Xuejia County, Xinbei District, Changzhou City, 213000, Jiangsu, P.R. China


Уполномоченный представитель: ООО «ДЕНТАЛВОРКШОП», Россия, 129626, г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный округ Алексеевский, ул. Новоалексеевская, д.22, к.2, помещ.ПБ, ком.27, 28, 29, 30А

РУ № _____ от ____.

17. ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

Символ	Описание
	Изготовитель

Символ	Описание
	Дата изготовления
	Медицинское изделие
	Использование автоматической очистки и термической дезинфекции
	Может подвергаться автоклавированию при температуре не более 134 °C
	Обратитесь к инструкции по применению
	Номер по каталогу
	Код партии
	Никель-титановый сплав
	Логотип производителя
	Не использовать больше 8 раз
	Нестерильно
	Верх
	Ограничение по количеству укладки упаковок
	Беречь от влаги

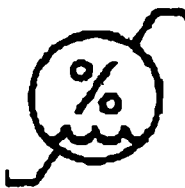Символ	Описание
	Предел температуры
	Диапазон влажности
	Ограничение атмосферного давления

18. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd. (Чанчжоу Сифари Медикал Технолоджи Ко. Лтд.),
No.99, Qingyang Road, Xuejia County, Xinbei District, Changzhou City, 213000, Jiangsu, P.R. China
Тел.: +86 0519 85962691

19. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНТАЛВОРКШОП» (ООО
«ДЕНТАЛВОРКШОП»), Россия, 129626, г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный округ Алексеевский, ул.
Новоалексеевская, д.22, к.2, помещ.ПБ, ком.27, 28, 29, 30А
Тел.: +7 963 990 84 38

20. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Условия транспортировки и хранения	Температура окружающей среды: -20 °С ~ +55 °С Относительная влажность: 20% - 80% Атмосферное давление: 70 кПа-106 кПа
------------------------------------	---

21. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия окружающей среды	Использование: в закрытых помещениях Температура окружающей среды: 5 °С ~ 40 °С Относительная влажность: <80%
--------------------------	---

22. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Вкрутите эндодонтический инструмент в патрон двигателя эндомотора с небольшим усилием до щелчка, указывающего на то, что инструмент на месте.

Рекомендуемая настройка двигателя эндомотора: конусность больше или равна 8%, крутящий момент 3,0 Н/см, скорость 300 об/мин. Конусность от 2% до 6%, крутящий момент 2,5 Н/см, скорость 350 об/мин. В зависимости от предпочтений пользователя и функции двигателя могут вноситься определенные изменения.

Пошаговые инструкции

1) Предварительное исследование

Весь корневой канал был прозондирован с помощью ручного файла ISO 10, рабочая длина (РД) была определена с помощью электронного апекслокатора в сочетании с рентгенограммой, подтверждена ирригация и проходимость.

2) Сделать прямую линию

После получения прямолинейного коронарного доступа создайте апикальную «ковровую дорожку» до размера ручного файла ISO 20, затем начните с файла 1708, чтобы установить прямую линию, медленно продвигайтесь вперёд покалывающими движениями, не надавливая.

Как только возникнет сопротивление, переходите к следующему шагу. Проверьте проходимость ручным файлом ISO 20, промойте и смажьте.

3) Формирование корневого канала

Под "иригацией" понимается средство для промывания корневого канала, обычно используется раствор гипохлорита натрия (NaClO), который играет роль стерилизатора, очищает корневой канал, растворяет остатки пульпы и смазывает стенки корневого канала. Гель ЭДТА часто используется попеременно с раствором гипохлорита натрия, чтобы помочь гипохлориту натрия глубже проникнуть в инфицированные дентинные каналы.

С ирригационным раствором в канале создайте и подтвердите воспроизводимую «ковровую дорожку» к РД с помощью файла 1902 до достижения рабочей длины. В зависимости от различных форм корневого канала выберите спецификацию файла для проводящего пути. Используйте следующий инструмент в последовательности 2004 до достижения рабочей длины, в случае необходимости 2504 и 2506 используются последовательно до достижения рабочей длины. Измерьте отверстие ручным файлом ISO 25, если инструмент имеет правильную длину, корневой канал сформирован и готов к пломбированию. Если ручной файл ISO 25 слишком длинный и свободный, используйте инструмент следующего размера 30#, при необходимости используйте также 35#, 40#, 50# или 60#, после каждого инструмента проводите измерения с помощью ручных файлов ISO 30, 35, 40, 50 или 60 соответственно. Для рабочей длины следуйте тем же инструкциям. Во время операции медленно продвигайтесь вперёд покалывающими движениями, не надавливая. Если возникает сопротивление, вернитесь к предыдущему шагу.

Предупреждения

1 Инструмент необходимо очищать, дезинфицировать и стерилизовать перед первым применением, а также после каждого последующего применения.

2) Инструменты, на которых появилась коррозия, возникла деформация, раскрутилась резьба, повреждены режущие поверхности, затупились лезвия или потерял цвет, подлежат утилизации.

3) Инструмент можно использовать не более 8 раз, это высчитывается по счётчику использования.

4) Режущие лезвия эндодонтических инструментов острые; соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы.

5) Для оптимальной работы рекомендуется использовать эндомотор. При использовании инструмента придерживайтесь рекомендуемых настроек мотора (скорости вращения и крутящего момента).

6) Инструмент нельзя погружать в раствор гипохлорита натрия.

7) Всегда применяйте минимальное давление в апикальной части. Не вводите инструмент в канал силой.

8) Необходима частая промывка; проводите рекапитуляцию и промывайте канал на протяжении всей процедуры, по меньшей мере, каждый раз, когда используется какой-либо инструмент.

9) Инструмент содержит никель-титановый сплав и не должен использоваться на людях с подтверждённой аллергической чувствительностью к этому материалу.

10) При работе с искривлёнными или неправильно сформированными корневыми каналами инструмент следует использовать с осторожностью.

Использование в сочетании с другими медицинскими изделиями, перечень рекомендуемых:

1. Эндомотор, модели: Ai-Motor, MotoPex, производства Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd., Китай, РУ № РЗН 2022/16390.
2. Эндомотор Endo Radar, производства Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd., Китай, РУ № РЗН 2018/8003.

*Рекомендуемые настройки приведены в разделе «Эксплуатация».

23. ГАРАНТИИ

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Гарантия эксплуатации — не менее 8 циклов санитарной обработки при соблюдении инструкции по применению.

Изготовитель не несет ответственность за использование инструмента не по назначению, не соблюдение инструкции по применению.

24. ОЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ

В целях гигиены и санитарной безопасности инструмент необходимо очищать, дезинфицировать и стерилизовать перед первым применением, а также после каждого последующего применения во избежание загрязнения. Это касается первого применения, а также каждого последующего применения. Ограничение количества процедур обработки определяется рабочими характеристиками/износом инструмента. Ввиду того, что максимальное количество применений эндодонтического инструмента равно 8, не следует проводить повторную обработку инструмента более 8 раз.

1) Общие рекомендации

- Пользователь несёт ответственность за стерильность изделия при первом цикле и при каждом последующем применении, а также за использование повреждённых или загрязнённых инструментов, если применимо после стерильности.
- В целях собственной безопасности используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки и т. д.).
- Используйте только эффективный одобренный дезинфицирующий раствор (перечень VAN/DGHM, маркировка CE и одобрение FDA), соблюдайте инструкции по применению от производителя дезинфицирующего раствора.
- Качество воды должно соответствовать местным нормам, особенно на последнем этапе ополаскивания или при использовании моюще-дезинфицирующих машин.
- Перед автоклавированием тщательно очистите и промойте инструмент.
- Не используйте отбеливающие или хлоридные дезинфицирующие материалы.

2) Инструкции по повторной обработке

Подготовка на месте использования	Перед очисткой отсоедините инструмент от эндомотора и снимите с инструмента ограничитель. Удалите сильные загрязнения с инструмента холодной водой (<40°C) сразу после использования. Не используйте фиксирующее моющее средство или горячую воду (> 40 °C), так как из-за этого остатки могут закрепиться, что может повлиять на результат повторной обработки. Храните инструмент во влажном месте.
--	--

	 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не погружайте инструмент и не протирайте его водой следующих типов: кислая электролизованная вода, сильный щелочной раствор или озонированная вода; медицинскими средствами (глутарал и т. д.); водой любых других специальных типов или коммерческими чистящими жидкостями. Такие жидкости могут вызвать коррозию металла и прилипание остатков медицинских средств к инструменту.
Транспортировка	Безопасное хранение и транспортировка в зону повторной обработки во избежание повреждения и загрязнения окружающей среды.
Подготовка к обеззараживанию	Инструмент необходимо обрабатывать в разобранном состоянии.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Соблюдайте соответствующие меры индивидуальной защиты.
Предварительная очистка	Выполните ручную предварительную очистку, пока инструмент не станет визуально чистым. Смойте грязь проточной водой в течение не менее 10 секунд и очистите поверхность щёткой с мягкой щетиной.
Очистка	Что касается очистки/дезинфекции, ополаскивания и сушки, то следует различать ручные и автоматизированные методы повторной обработки. Предпочтение следует отдавать автоматизированным методам повторной обработки, особенно в связи с лучшими возможностями стандартизации и промышленной безопасностью. Автоматическая очистка: Аккуратно поместите инструмент в моюще-дезинфицирующую машину на лоток и установите следующие параметры, затем запустите программу: • 4 мин — предварительная промывка холодной водой (< 40 °C) • опорожнение • 5 мин — промывка мягким щелочным моющим средством при 55 °C • опорожнение • 3 мин — нейтрализация тёплой водой (40 °C) • опорожнение • 5 мин — промежуточное ополаскивание тёплой водой (40 °C) • опорожнение Процессы автоматизированной очистки прошли валидацию с использованием 0,5% неодишера MediClean forte (Dr. Weigert).
	Примечание Согласно EN ISO 17664 для инструмента не требуются методы ручной повторной обработки. Если необходимо использовать ручной метод повторной обработки, необходимо выполнить его валидацию перед применением.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Использовать только одобренные моюще-дезинфицирующие машины в соответствии с EN ISO 15883, регулярно проводить их обслуживание и калибровку. • Следуйте инструкциям и соблюдайте концентрации, указанные производителем.
Дезинфекция	Автоматическая термическая дезинфекция в моюще-дезинфицирующей машине с учётом национальных требований в отношении значения A0 (см. EN ISO 15883). Было подтверждено, что цикл дезинфекции в течение 5 минут при температуре 93 °C обеспечивает достижение изделием значения A0, равного 3000. После очистки инструмент следует немедленно дезинфицировать автоматическим методом. Ручная дезинфекция не рекомендуется. Используйте полностью деминерализованную воду.
Сушка	Автоматическая сушка: Сушка инструмента в соответствии с циклом сушки моюще-дезинфицирующей машины. При необходимости возможна дополнительная ручная сушка безворсовым полотенцем.

	Продуйте полость инструмента стерильным сжатым воздухом.
Упаковка	Упакуйте инструмент в подходящий упаковочный материал для стерилизации.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Проверьте срок годности пакета, указанный производителем, чтобы определить срок хранения. • Используйте пакеты, устойчивые к температуре до 141 °C и соответствующие стандарту EN ISO 11607.
Стерилизация	Стерилизация инструмента путём применения процесса фракционной стерилизации паром с предварительным вакуумированием (согласно EN 285/EN 13060/EN ISO 17665) с учётом требований соответствующей страны. Минимальные требования: 5 мин при 134 °C. Максимальная температура стерилизации: 137 °C. Время высыхания: не менее 8 мин.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Используйте только утверждённые автоклавы в соответствии с EN 13060 или EN 285. • Соблюдайте порядок технического обслуживания автоклава, указанный производителем. • Используйте только эту рекомендуемую процедуру стерилизации. • Контролируйте эффективность (целостность упаковки, отсутствие влаги, изменение цвета индикаторов стерилизации, физико-химических интеграторов, цифровые записи параметров циклов). • Процедура стерилизации должна соответствовать EN ISO 17665. • Прежде чем прикасаться, дождитесь охлаждения.
Хранение	Храните стерилизованный инструмент в сухой, чистой и беспыльной среде при умеренных температурах, см. этикетку и инструкции по применению.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Стерильность не может быть гарантирована, если упаковка открыта, повреждена или намокла.

	Перед использованием проверьте упаковку (целостность упаковки, отсутствие влаги и срок годности).
Информация о валидации повторной обработки	Вышеупомянутый процесс повторной обработки (очистка, дезинфекция, стерилизация) был успешно валидирован.
 ПРИМЕЧАНИЕ Приведённые выше инструкции утверждены изготовителем медицинского изделия как способные подготовить медицинское изделие к использованию. Лицо, выполняющее обработку, отвечает за обеспечение того, чтобы при обработке, фактически выполняемой с использованием оборудования, материалов и персонала в пункте обработки, был достигнут желаемый результат. Для этого требуется проверка и/или валидация и регулярный контроль процесса. Аналогичным образом, любое отклонение лица, выполняющего обработку, от предоставленных инструкций необходимо должным образом оценить на предмет эффективности и возможных неблагоприятных последствий.	

25. УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия относятся к классу Б по СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные изделия по прямому назначению или по причине окончания срока годности относятся к классу А по СанПиН 2.1.3684-21 и утилизируются, как бытовые отходы.

26. СТАНДАРТЫ

Стандарт	Название стандарта
Регламент (ЕС) 2017/745	Регламент (ЕС) 2017/745 Европейского парламента и Совета от 5 апреля 2017 года о медицинских изделиях, вносящий поправки в Директиву 2001/83/ЕС, Регламент (ЕС) № 178/2002 и Регламент (ЕС) № 1223/2009 и отменяющий директивы Совета 90/385/ЕЕС и 93/42/ЕЕС
MEDDEV 2.7/1 ред. 4:2016	Клиническая оценка: Руководство для изготовителей и нотифицированных органов в соответствии с Директивами 93/42/ЕЕС и 90/385/ЕЕС
MEDDEV 2.12-1 ред. 8:2013	Руководство по системе надзора за медицинскими изделиями
MEDDEV 2.12/2 ред 2:2012	Руководящие принципы для медицинских изделий — исследование постмаркетингового клинического наблюдения
EN ISO 13485:2016+A11:2021	Медицинские изделия. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования
EN ISO 14971:2019+A11:2021	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
ISO/TR 24971:2020	Изделия медицинские. Руководство по применению ISO 14971
EN 62366-1:2015+A1:2020	Медицинские изделия. Часть 1: Проектирование медицинских изделий с учётом эксплуатационной пригодности
EN ISO 10993-1:2020	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1: Оценка и исследования в процессе менеджмента рисков
EN ISO 10993-5:2009	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5: Исследования на цитотоксичность: методы in vitro
ISO 10993-10:2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10: Испытания на сенсибилизацию кожи
EN ISO 10993-11:2018	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11: Исследования общетоксического действия
EN ISO 10993-23:2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 23: Испытания на способность вызывать

	раздражение
EN ISO 7405:2018	Стоматология. Оценка биологической совместимости медицинских изделий, используемых в стоматологии
EN ISO 17665-1:2006	Стерилизация медицинской продукции. Стерилизация паром. Часть 1: Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий
ISO/TS 17665-2:2009	Стерилизация медицинской продукции. Стерилизация паром. Часть 2: Руководство по применению стандарта ISO 17665-1
ISO 17664-1:2021	Обработка медицинской продукции. Информация, предоставляемая изготовителем для проведения обработки медицинских изделий. Часть 1: Критические и полукритические медицинские изделия
AAMI TIR12:2010	Разработка, тестирование и маркировка многоразовых медицинских изделий для повторной обработки в медицинских учреждениях: Руководство для изготовителей медицинских изделий
AAMI TIR30:2011 (R2016)	Процессы, материалы, методы испытаний и критерии приёмки при очистке многоразовых медицинских изделий
EN 13060:2014	Малые паровые стерилизаторы
EN ISO 15883-1:2009+A1:2014	Машины моюще-дезинфицирующие. Часть 1: Общие требования, термины, определения и испытания
EN ISO 15883-2:2009	Машины моюще-дезинфицирующие. Часть 2: Требования и методы испытаний моюще-дезинфицирующих машин, использующих термическую дезинфекцию хирургических инструментов, оборудования для анестезии, чашек, тарелок, приёмников, посуды, изделий из стекла и т.д.
ISO/DIS 15883-5:2019	Машины моюще-дезинфицирующие. Часть 5: Требования к рабочим характеристикам и критерии метода испытаний для демонстрации эффективности очистки
ASTM F1980:2016	Стандартное руководство по ускоренному старению стерильных барьерных систем для медицинских изделий
ISTA 2A:2011	Комплектные изделия 150 фунтов (68 кг) или меньше
EN ISO 20417:2021	Изделия медицинские. Информация, предоставляемая изготовителем
ISO 15223-1:2021	Изделия медицинские. Символы, применяемые в документации, предоставляемой производителем. Часть 1: Общие требования
EN ISO 780:2015	Упаковка. Транспортная тара. Графические обозначения, применяемые для обработки и хранения упаковок
EN ISO 21531:2009	Стоматология. Графические символы для стоматологических инструментов
EN 1639:2009	Стоматология. Медицинские стоматологические приборы. Инструменты
EN ISO 3630-1:2019	Стоматология. Эндодонтические инструменты. Часть 1: Общие требования
ISO 3630-5:2020	Стоматология. Эндодонтические инструменты. Часть 5: Инструменты для фасонирования и чистки
EN ISO 1797:2017	Стоматология. Хвостовики для ротационных и осциллирующих инструментов
ISO/TR 20416:2020	Изделия медицинские. Система наблюдения, применяемая изготовителем после выпуска изделий в обращение

ГОСТ 31214-2016. «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, предоставляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность».

ГОСТ Р 52770-2023. «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

ГОСТ ISO 10993-1-2021. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска».

ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными».

ГОСТ ISO 10993-5-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы invitro».

ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

ГОСТ ISO 10993-11-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия»;

ГОСТ ISO 10993-12-2015. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы».

ГОСТ 19126-2007 «Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия».

ГОСТ Р ИСО 1797-2018 «Инструменты стоматологические. Хвостовики».

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»

ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»

ГОСТ Р 50351.1-92 «Инструменты стоматологические для лечения и обработки канала корня зуба. Часть 1. Корневые напильники, дрельборы, пульпоэкстракторы, рашпили, каналонаполнители, зонды и ватные иглы»

27. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Инструмент является неремонтопригодным изделием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обо всех серьезных происшествиях следует информировать производителя и уполномоченного представителя.

02168509

Китайский совет по содействию международной торговле
Китайская палата международной торговли

Сертификат

QR-код
№ 243301A0/007750

Этот сертификат подтверждает, что: печать Чанчжоу Сифари Медикал
Технолоджи Ко. Лтд. на приложенном документе является подлинной

Печать/
Китайский совет по международной торговле

Подпись уполномоченного лица: Чжан Шаоя

Дата: 07 июня 2024 г.

Веб-сайт для подтверждения сертификата: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

Перевод с английского и китайского языков на русский язык

/Печать Чанчжоу Сифари Медикал Технолоджи Ко. Лтд.
/Подпись

Перевод данного текста выполнен переводчиком Пахтуновым Алексеем Владимировичем.

**Российская Федерация
Город Москва
Пятнадцатого июля две тысячи двадцать четвертого года**

Я, Юракова Диана Шевкетовна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Корсик Марии Александровны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Пахтунова Алексея Владимировича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2024- *33 - 1210*

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Д. Ш. Юракова

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью **115** лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса

