

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «ШАНС»




Боцевин А.А.


августа 2023 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«Жгут кровоостанавливающий турникетного типа ТБС
по ТУ 21.20.24-001-73305121-2023»**

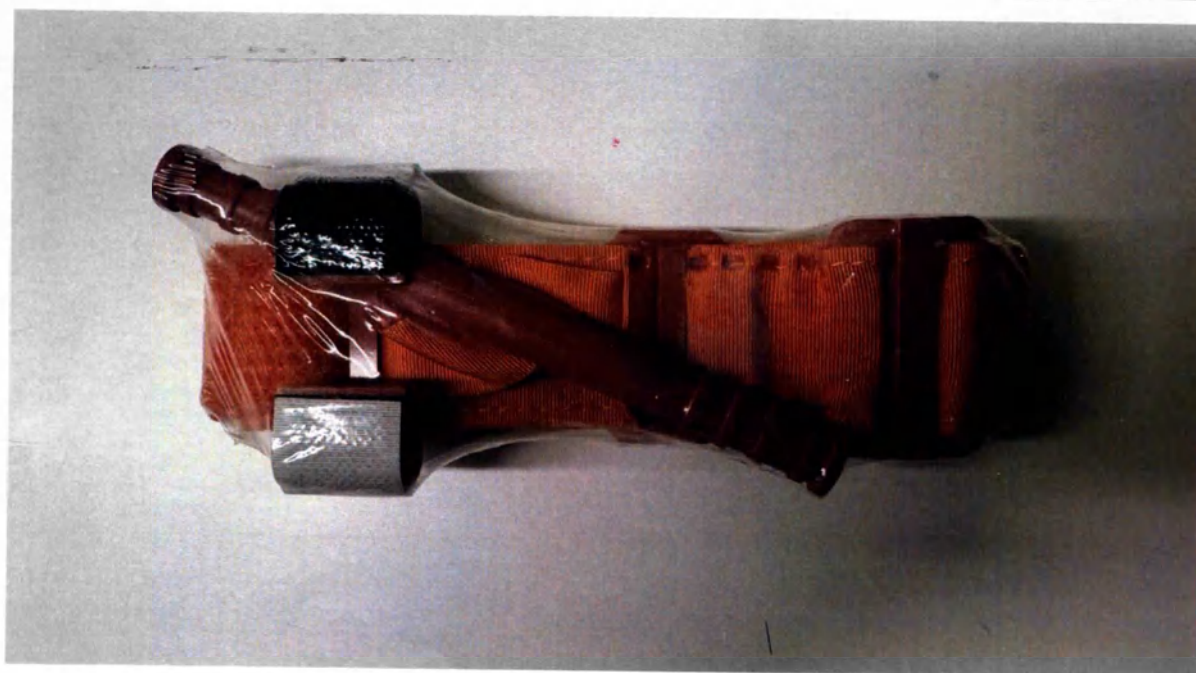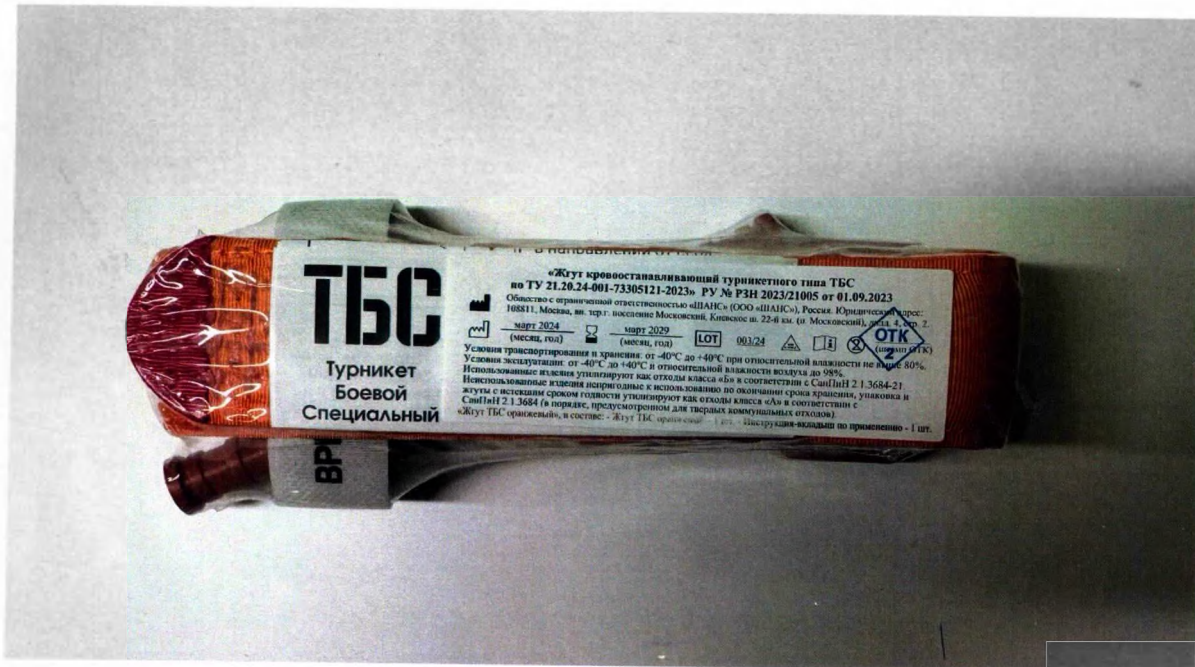




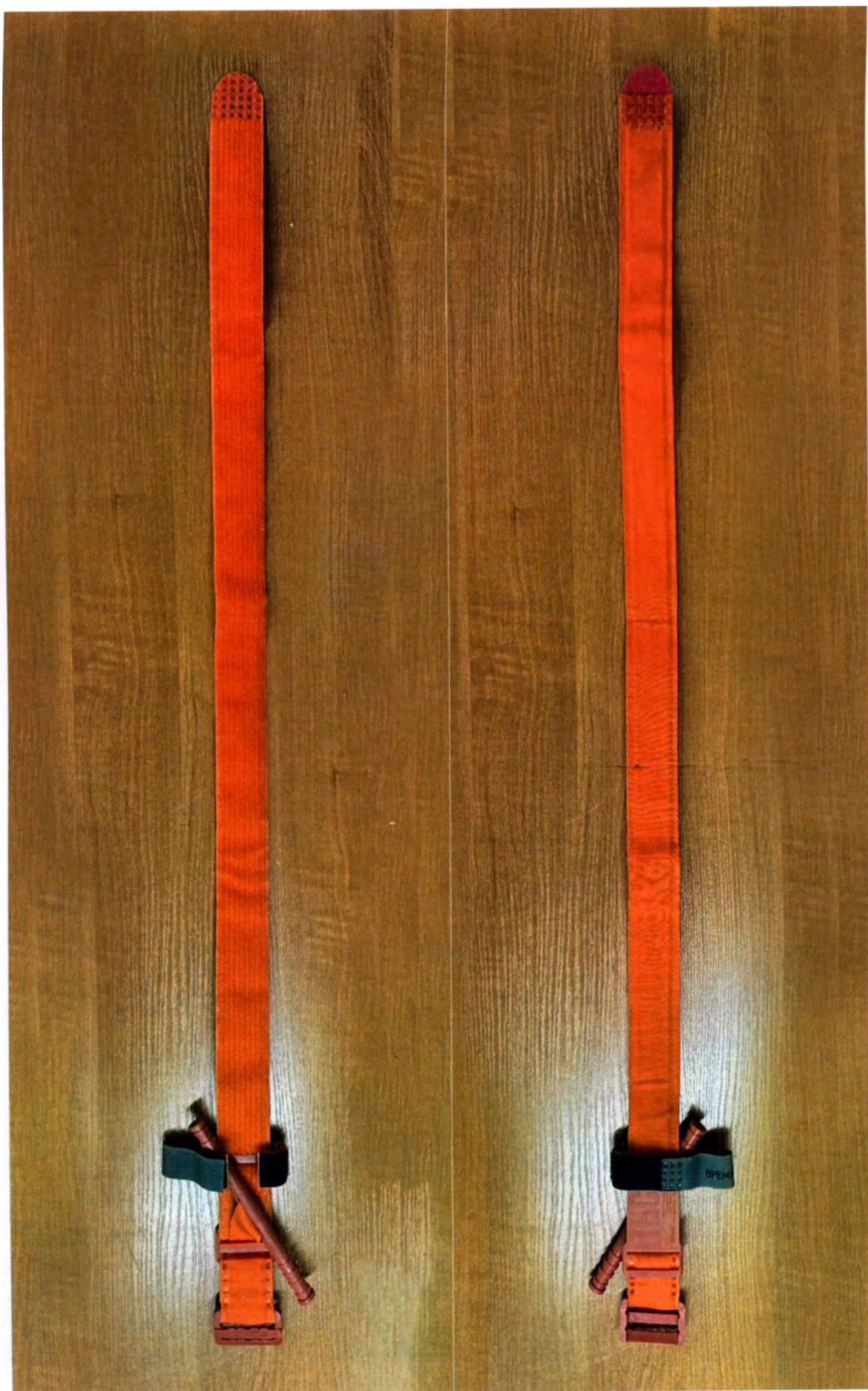

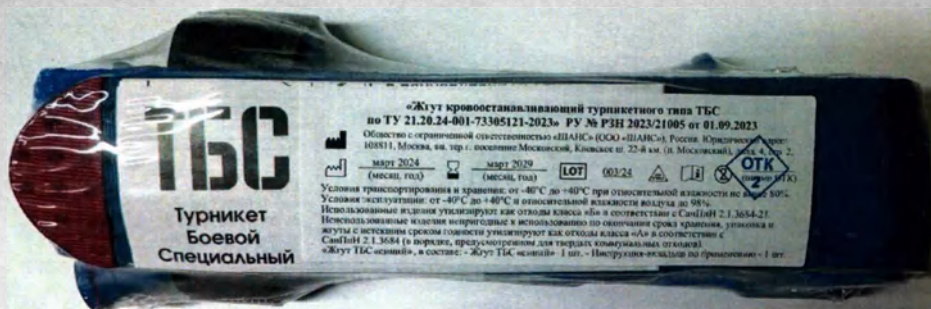



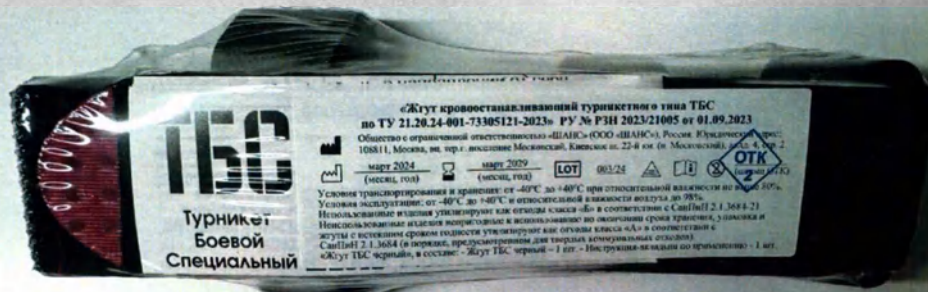

ТБС

Турникет
Боевой
Специальный

ООО «ШАНС» ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Круги кровоостанавливающего турникета типа ТБС»
по ТУ 21.20.24-001-2019/21-2023
РП № РПН 302323005-01.08.2023

Производитель: ООО «Шанс» 198813, г. Москва, д. пер. г. Московский,
Московский, ул. Космонавтов 22-й в. Московский, д. пер. 2,
мет. стан. 3-801 746 01 00, email: info@shans.ru, info@shans.ru
Гарантийный срок изделия турникета - 5 лет со дня изготовления.
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные небрежным
использованием турникета и нарушением хранения.
Крайне важно в случае повреждения турникета в связи
составлением комплекта с температурой воздуха от -40 до +40 °C и
относительной влажностью воздуха не выше 60%.

Дата производства:

НАЛОЖЕНИЕ ТУРНИКЕТА НА НИЖНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ

1. При самопомощи для наложения турникета на ногу, полностью раскройте турникет. Наложите турникет максимально высоко на пострадавшую ногу, на одежду. Проденьте конец ленты через 1 окошко пряжки, в направлении от себя.
2. Для оказания взаимопомощи другому, получите доступ к ране и наложите турникет 5-8 см выше места кровотока на одежду (но не на кожу). Проденьте конец ленты через 2 окошко пряжки.
3. Затяните турникет максимально туго.
4. Используя вороток, затяните турникет максимально туго, до остановки массового кровотечения. Если не остановлено - продолжайте крутить вороток.
5. Заверните вороток в скобу. Убедитесь, что он надежно зафиксирован. Зафиксируйте свободный конец ленты на вилке турникета.
6. Закройте вороток предохранительной стропой. При тактической возможности затяните время наложения.



НАЛОЖЕНИЕ ТУРНИКЕТА НА ВЕРХНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ


1. Достаньте турникет. Разместите кольцо на пострадавшей руке максимально высоко к подмышке на одежду, концы стропы в сторону грудной клетки.
2. Затяните свободный конец турникета максимально туго, и зафиксируйте на вилке.
3. Используя вороток, затяните турникет максимально туго, до остановки массового кровотечения. Если не остановлено - крутите вороток еще.
4. Заверните вороток в скобу. Убедитесь, что он надежно зафиксирован.
5. Свободным концом ленты оберните руку еще раз и закройте вместе с воротком предохранительной стропой. При тактической возможности затяните время наложения.

УКЛАДКА ТУРНИКЕТА

1. Проденьте конец ленты вилкой через 1 (ближнее) отверстие пряжки и отбросьте расстояние с ладонь. Зафиксируйте ленту вилкой по направлению к себе.
2. Сложите получившуюся конструкцию пополам.
3. Убедитесь, что предохранительная стропы с указанными артезионами открыты.
4. Разместите уложенный турникет в подмышку для турникета.

1. Турникет должен быть уложен в подмышку для турникета.
2. Турникет должен быть уложен в подмышку для турникета.
3. Турникет должен быть уложен в подмышку для турникета.
4. Турникет должен быть уложен в подмышку для турникета.



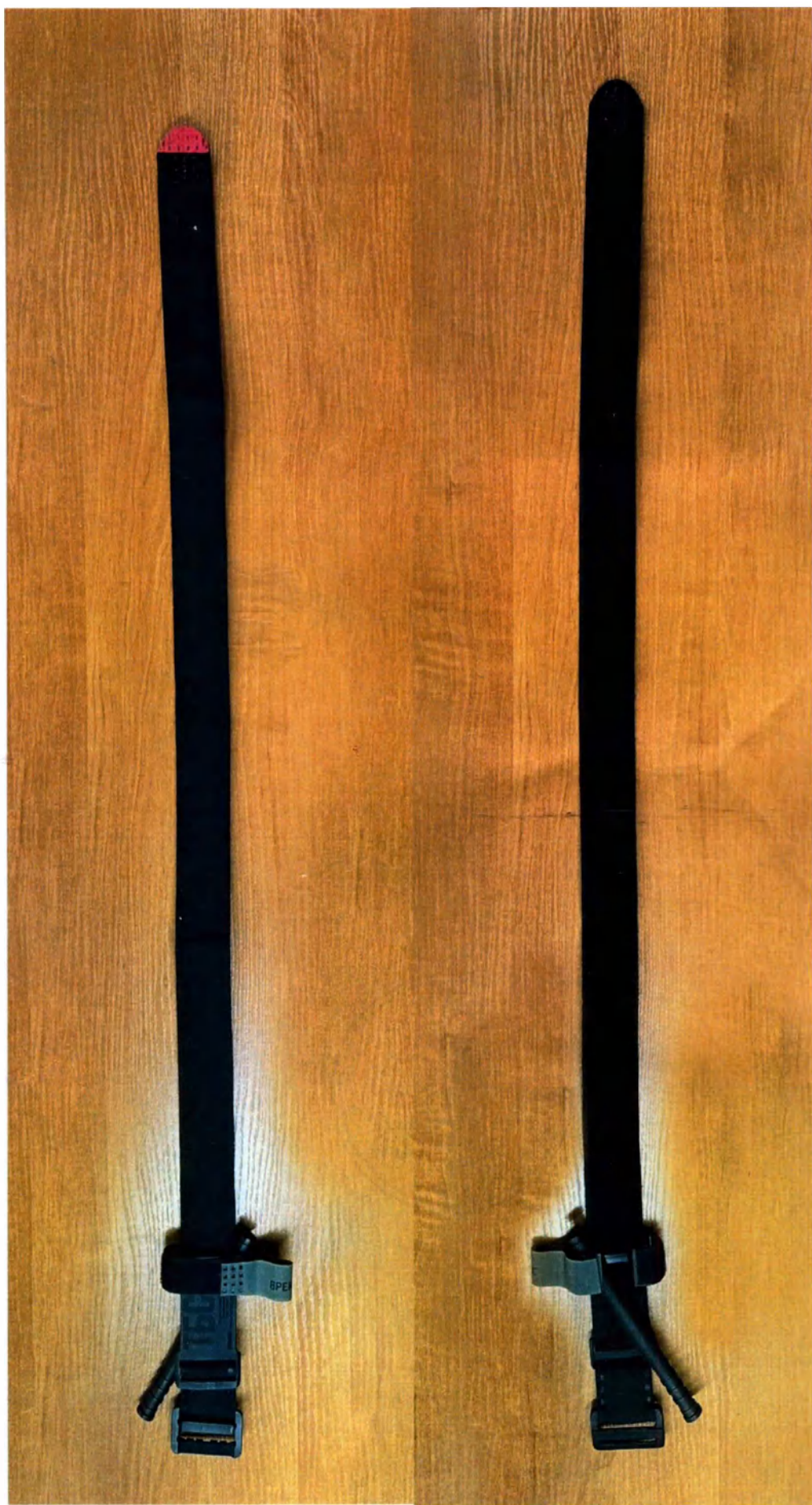

Прошито и опечатано

10 (десять) листов

Генеральный Директор ООО «ШАНС»

Боцвин А.А

М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ШАНС»



_____ Боцвин А.А.

_____ августа 2023 г.

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ УПАКОВКИ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Жгут кровоостанавливающий турникетного типа ТБС

по ТУ 21.20.24-001-73305121-2023»

**«Жгут кровоостанавливающий турникетного типа ТБС
по ТУ 21.20.24-001-73305121-2023» РУ № РЗН 2023/21005 от 01.09.2023**



Общество с ограниченной ответственностью «ШАНС» (ООО «ШАНС»), Россия. Юридический адрес:
108811, Москва, вн. тер.г. поселение Московский, Киевское ш. 22-й км. (п. Московский), д/д. 4, стр. 2.



_____ (месяц, год)



_____ (месяц, год)

LOT



ОТК

(штамп ОТК)

Условия транспортирования и хранения: от -40°C до +40°C при относительной влажности не выше 80%.

Условия эксплуатации: от -40°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 98%.

Использованные изделия утилизируют как отходы класса «Б» в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные изделия непригодные к использованию по окончании срока хранения, упаковка и жгуты с истекшим сроком годности утилизируют как отходы класса «А» в соответствии с СанПиН 2.1.3684 (в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов).

«Жгут ТБС оранжевый», в составе: - Жгут ТБС оранжевый – 1 шт. - Инструкция-вкладыш по применению - 1 шт.

Макет маркировки индивидуальной упаковки варианта исполнения «Жгут ТБС оранжевый»

**«Жгут кровоостанавливающий турникетного типа ТБС
по ТУ 21.20.24-001-73305121-2023» РУ № РЗН 2023/21005 от 01.09.2023**



Общество с ограниченной ответственностью «ШАНС» (ООО «ШАНС»), Россия. Юридический адрес:
108811, Москва, вн. тер.г. поселение Московский, Киевское ш. 22-й км. (п. Московский), д/зд. 4, стр. 2.



_____ (месяц, год)



_____ (месяц, год)



Условия транспортирования и хранения: от -40°C до +40°C при относительной влажности не выше 80%.

Условия эксплуатации: от -40°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 98%.

Использованные изделия утилизируют как отходы класса «Б» в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные изделия непригодные к использованию по окончании срока хранения, упаковка и жгуты с истекшим сроком годности утилизируют как отходы класса «А» в соответствии с

СанПиН 2.1.3684 (в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов).

«Жгут ТБС черный», в составе: - Жгут ТБС черный – 1 шт. - Инструкция-вкладыш по применению - 1 шт.

Макет маркировки индивидуальной упаковки варианта исполнения «Жгут ТБС черный»

**«Жгут кровоостанавливающий турникетного типа ТБС
по ТУ 21.20.24-001-73305121-2023» РУ № РЗН 2023/21005 от 01.09.2023**



Общество с ограниченной ответственностью «ШАНС» (ООО «ШАНС»), Россия. Юридический адрес:
108811, Москва, вн. тер.г. поселение Московский, Киевское ш. 22-й км. (п. Московский), д/д. 4, стр. 2.



(месяц, год)



(месяц, год)



ОТК

(штамп ОТК)

Условия транспортирования и хранения: от -40°C до +40°C при относительной влажности не выше 80%.

Условия эксплуатации: от -40°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 98%.

Использованные изделия утилизируют как отходы класса «Б» в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные изделия непригодные к использованию по окончании срока хранения, упаковка и жгуты с истекшим сроком годности утилизируют как отходы класса «А» в соответствии с СанПиН 2.1.3684 (в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов).

«Жгут ТБС синий », в составе: - Жгут ТБС синий – 1 шт. - Инструкция-вкладыш по применению - 1 шт.

Макет маркировки индивидуальной упаковки варианта исполнения «Жгут ТБС синий»

Жгут кровоостанавливающий турникетного типа ТБС по ТУ 21.20.24-001-73305121-2023

«Жгут ТБС синий», в составе:

- Жгут ТБС синий– 1 шт.
- Инструкция-вкладыш по применению - 1 шт.

(штамп ОТК)

Регистрационное удостоверение № РЗН _____ от _____



Общество с ограниченной ответственностью «ШАНС» (ООО «ШАНС»), Россия.

Юридический адрес: 108811, Москва, вн. тер.г. поселение Московский, Киевское ш. 22-й км. (п. Московский), двлд. 4, стр. 2.



(месяц, год)



(месяц, год)



Количество упаковок: _____ шт.

Условия транспортирования и хранения: от минус 40 до плюс 40°C при относительной влажности не выше 80%.

Использованные изделия утилизируют как отходы класса «Б» в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные изделия непригодные к использованию по окончании срока хранения, упаковка и жгуты с истекшим сроком годности утилизируют как отходы класса «А» в соответствии с СанПиН 2.1.3684 (в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов)

Макет маркировки транспортной упаковки варианта исполнения «Жгут ТБС синий»

Жгут кровоостанавливающий турникетного типа ТБС по ТУ 21.20.24-001-73305121-2023

«Жгут ТБС черный», в составе:

- Жгут ТБС черный – 1 шт.
- Инструкция-вкладыш по применению - 1 шт.

(штамп ОТК)

Регистрационное удостоверение № РЗН _____ от _____



Общество с ограниченной ответственностью «ШАНС» (ООО «ШАНС»), Россия.

Юридический адрес: 108811, Москва, вн. тер.г. поселение Московский, Киевское ш. 22-й км. (п. Московский), двлд. 4, стр. 2.



(месяц, год)



(месяц, год)



Количество упаковок: _____ шт.

Условия транспортирования и хранения: от минус 40 до плюс 40°C при относительной влажности не выше 80%.

Использованные изделия утилизируют как отходы класса «Б» в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные изделия непригодные к использованию по окончании срока хранения, упаковка и жгуты с истекшим сроком годности утилизируют как отходы класса «А» в соответствии с СанПиН 2.1.3684 (в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов)

Макет маркировки транспортной упаковки варианта исполнения «Жгут ТБС черный»

Жгут кровоостанавливающий турникетного типа ТБС по ТУ 21.20.24-001-73305121-2023

«Жгут ТБС оранжевый», в составе:

- Жгут ТБС оранжевый – 1 шт.
- Инструкция-вкладыш по применению - 1 шт.

(штамп ОТК)

Регистрационное удостоверение № РЗН _____ от _____



Общество с ограниченной ответственностью «ШАНС» (ООО «ШАНС»), Россия.

Юридический адрес: 108811, Москва, вн. тер.г. поселение Московский, Киевское ш. 22-й км. (п. Московский), двлд. 4, стр. 2.



(месяц, год)



(месяц, год)



Количество упаковок: _____ шт.

Условия транспортирования и хранения: от минус 40 до плюс 40°C при относительной влажности не выше 80%.

Использованные изделия утилизируют как отходы класса «Б» в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованные изделия непригодные к использованию по окончании срока хранения, упаковка и жгуты с истекшим сроком годности утилизируют как отходы класса «А» в соответствии с СанПиН 2.1.3684 (в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов)

Макет маркировки транспортной упаковки варианта исполнения «Жгут ТБС оранжевый»

Прошито и опечатано

7 (семь)

листов

Генеральный Директор ООО «ШАНС»

Боцвин А.А

М.П.

