


КОПИЯ С КОПИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материал хирургический шовный не рассасывающийся
(Meril Endosurgery Pvt.Ltd. («Мэрил Эндо Сёрджерн Пвт.Лтд.»), Индия)

APPROVED BY

Sanjeev Bhatt
General Manager
« 28 » August 2015

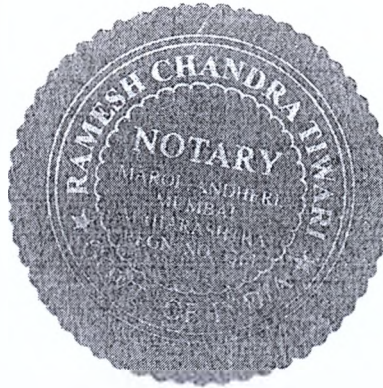


ATTESTED

Sujata
(Sujata Paranjpe)
Asst. Secretary

TRUE COPY

Ramesh
RAMESHCHANDRA TIWARI
ADVOCATE & NOTARY
GOVT OF INDIA

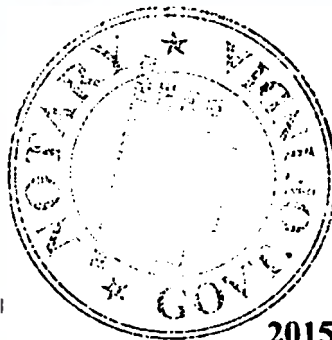

2015



31 AUG 2015

наименование изделия

материал хирургический шовный не рассасывающийся».

производитель:

Endosurgery Pvt.Ltd. («Мэрил Эндосуржери Пвт.Лтд.»), Индия.

1 Floor, E1-E3, Meril Park, Syrvey No 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi, Gujarat, India – 396191.

адрес производства:

Endosurgery Pvt.Ltd. («Мэрил Эндосуржери Пвт.Лтд.»), Индия.

1 Floor, E1-E3, Meril Park, Syrvey No 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi, Gujarat, India – 396191.

Изготовление, производство и продажа изделия соответствует требованиям ISO 13485:2003. Номер сертификата: 148025-2013-AQ-IND-NA, дата выдачи – 18/02/2014, дата истечения действия – 18/02/2017, нотифицированный орган: Det Norske Veritas Certification AS), изделие имеет маркировку CE (номер сертификата обзора технической документации (для изделий класса риска 3): 151520-2014-CE-IND-NA-D, дата выдачи – 10/04/2014, дата истечения действия – 10/04/2019, нотифицированный орган: Det Norske Veritas Certification

изделия по Общероссийскому классификатору продукции ОК-005-93: 93 9370.

Изделие в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н –

Классификационные признаки вида МИ в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н – 262070.

Взаимодействие с организмом человека: постоянный (пожизненный) контакт с внутренней поверхностью и тканями организма.

Область применения: изделие применяется в условиях лечебно-профилактических учреждений.

сфера применения

Изделие применяется в хирургии в качестве одноразового стерильного шовного не рассасывающегося материала, для адаптации мягких тканей и/или лигатуры, включая применение в офтальмологии

характеристики изделия

Материал хирургический шовный не рассасывающийся представлен в нескольких исполнениях, каждое исполнение имеет свою цифровую кодировку. Упаковка с материалом кит также иглу. Материал доступен в широком перечне типоразмеров – с различной толщиной и диаметром нити, а также формой иглы.

материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAMIDE:

Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAMIDE окрашивается в черный цвет с помощью гематина НСК (Номер цветового кода 77266). Шовные материалы FILAMIDE могут иметь различную толщину и длину нити, поставляться отдельно или вместе со стандартными иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров.

материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAPROP с иглой:

Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAPROP поставляются окрашенными в синий цвет фталоцианином голубым (Номер цветового кода 74160). Шовные материалы *FILAPROP* могут иметь различную толщину и длину нитей, прикрепленных стандартным иглам


Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILASILK с иглой:

Шовные материалы FILASILK поставляются неокрашенными или окрашенными в черный цвет с помощью гематина HCK, покрываются пчелиным воском. Шовные материалы FILASILK могут иметь различную толщину и длину нити.

Материал хирургический шовный не рассасывающийся MERICRON XL с иглой:

Материал хирургический шовный не рассасывающийся MERICRON XL с иглой поставляется неокрашенным или окрашивается в зеленый цвет красителем D & C Green - № 6. Шовные материалы MERICRON XL могут иметь различную толщину и длину нитей, прикрепленные к стандартным иглам из нержавеющей стали различных типов и размеров.

Фотография или изображение

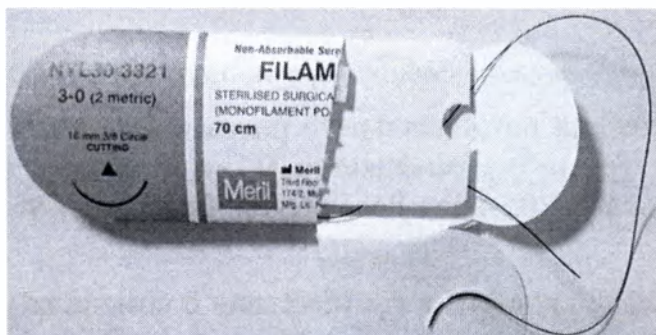

Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAMIDE




Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAPROP с иглой



Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILASILK с иглой



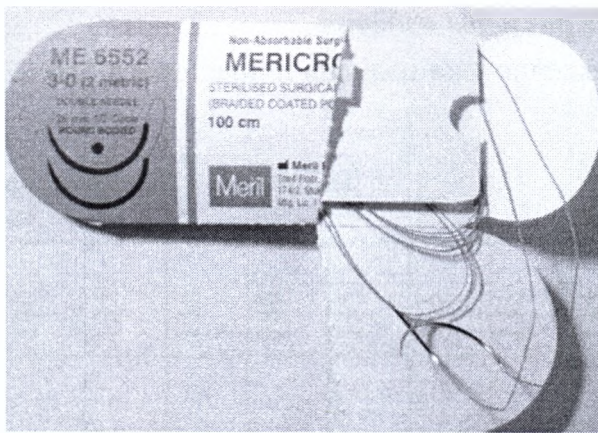

Материал хирургический шовный не рассасывающийся MERICRON XL с иглой

Техническая спецификация

Материалы:

Наименование	Материал
Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAMIDE с иглой	полиамид 6 [(NH-CO-(CH ₂) ₆) _n или полиамид 6,6 (NH-(CH ₂) ₆ -NH-CO-(CH ₂) ₄ -CO) _n . CAS#63428-84-2 Краситель B6 (Black). Краситель B8 (Blue).
Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAMIDE без иглы	полиамид 6 [(NH-CO-(CH ₂) ₆) _n или полиамид 6,6 (NH-(CH ₂) ₆ -NH-CO-(CH ₂) ₄ -CO) _n . CAS#63428-84-2 Краситель B6 (Black).
Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAPROP с иглой	Изотактический кристаллический стереоизомер полипропилена, синтетического линейного полиолефина (C ₃ H ₆) _n . CAS# 9002-88-4 Краситель B8 (Blue).
Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILASILK с иглой	100% шелк. Краситель B6 (Black).
Материал хирургический шовный не рассасывающийся MERICRON XL с иглой	Полиэтилентерефталат(C ₁₀ H ₆ O ₄) _n Покрытие - полибутилат [поли{окси-1,4-бутанедил-окси(1,6-диоксо-1,6-гексанедил)]. CAS#25038-59-9 Краситель B75 (Green). Краситель B1 (White).
Игла	медицинская сталь (марка: 420J2)

Конструкция и габаритные размеры изделия

Основные технические характеристики изделия приведены в Табл.2.1-2.4

Таблица 2.1 Технические характеристики изделий



Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, ЕР	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAMIDE с иглой											
NYL1001756	Черный	10-0	0,2	0,020–0,029	90	6	HC SM	0,14	0,11	180	0,027
NYL306631	Черный	3-0	2	0,200–0,249	90	25	CU RB	0,53	0,42	135	0,028
NYL301627	Черный	3-0	2	0,200–0,249	90	35	CU RC	0,53	0,42	135	0,028
NYL010738	Черный	1-0	4	0,400–0,499	90	50	HC RC	0,98	0,78	180	0,029
NYL406621	Черный	4-0	1,5	0,150–0,199	90	20	CU SM	0,43	0,34	135	0,028
NYL501854	Голубой	5-0	1	0,100–0,149	90	16	CU CT	0,38	0,30	135	0,027
NYL501502	Черный	5-0	1	0,100–0,149	90	15	CU SM	0,38	0,30	135	0,027
NYL601600	Черный	6-0	0,7	0,070–0,099	90	9	CU RC	0,24	0,19	135	0,027
NYL300079	Черный	3-0	2	0,200–0,249	90	80	CU RC	0,53	0,42	135	0,028
NYL013348	Черный	1-0	4	0,400–0,499	90	50	HC RB	0,98	0,78	180	0,029
NYL202422	Черный	2-0	3	0,300–0,349	90	38	CU RC	0,73	0,58	135	0,028
NYL206641	Черный	2-0	3	0,300–0,349	90	25	CU RC	0,73	0,58	135	0,028

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
NYL010743	Черный	1-0	4	0,400-0,499	90	35	HC RB	0,98	0,78	180	0,029
NYL901769	Черный	9-0	0,3	0,030-0,039	90	6,3	CU SM	0,14	0,11	180	0,027
NYL303211	Черный	3-0	2	0,200-0,249	90	16	CU RC	0,53	0,42	135	0,028
NYL100379	Черный	0-0	3,5	0,350-0,399	90	45	HC TC	0,83	0,66	180	0,028
NYL012441	Черный	1-0	4	0,400-0,499	90	38	CU RC	0,98	0,78	135	0,029
NYL1007000	Черный	10-0	0,2	0,020-0,029	90	5,3	HC SM	0,14	0,11	180	0,027
NYL203256	Черный	2-0	3	0,300-0,349	90	36	HC RC	0,73	0,58	180	0,028
NYL501858	Голубой	5-0	1	0,100-0,149	90	25	CU CT	0,38	0,30	135	0,027
NYL103227	Черный	0-0	3,5	0,350-0,399	90	30	CU RC	0,83	0,66	135	0,028
NYL801765	Черный	8-0	0,4	0,040-0,049	90	8	CU RC	0,14	0,11	135	0,027
NYL010757	Черный	1-0	4	0,400-0,499	90	45	HC TC	0,98	0,78	180	0,029
NYL808170	Черный	8-0	0,4	0,040-0,049	90	9	CU RB	0,14	0,11	135	0,027
NYL010720	Черный	1-0	4	0,400-0,499	90	50	HC RB	0,98	0,78	180	0,029

Код для заказа (артикул)	Окраск а нити	Условн ый номер, USP	метрически й размер, EP	диамет р нити, мм	длина нити, см (± 2%)	длина иглы, мм (± 1%)	иглы	иглы, мм (± 1%)	в зоне крепления шовной нити, мм (± 1%)	б иглы , град	притуплен ия рабочей части иглы, не более мм (± 1%)
							BP				
NYL802812	Черный	8-0	0,4	0,040– 0,049	90	4,8	CU RB	0,14	0, 11	135	0,027
NYL103250	Черный	0-0	3,5	0,350– 0,399	90	36	HC RC	0,83	0, 66	135	0,028
NYL500661	Черный	5-0	1	0,100– 0,149	90	20	CU SM	0,38	0, 30	135	0,027
NYL500532	Черный	5-0	1	0,100– 0,149	90	25	CU SM	0,38	0, 30	135	0,027
NYL600507	Черный	6-0	0,7	0,070– 0,099	90	15	CU SM	0,24	0, 19	135	0,027
NYL405503	Черный	4-0	1,5	0,150– 0,199	90	25	CU SM	0,43	0, 34	135	0,028
NYL013257	Черный	1-0	4	0,400– 0,499	90	36	HC RC	0,98	0, 78	180	0,029
NYL015415	Черный	1-0	4	0,400– 0,499	90	40	HC TC	0,98	0, 78	180	0,029
NYL023259	Черный	2-0	3	0,300– 0,349	90	48	HC RC	1,20	0, 96	180	0,029
NYL50 3316	Черный	5-0	1	0,100– 0,149	90	13	CU RC	0,38	0, 30	135	0,027
NYL40 3319	Черный	4-0	1,5	0,150– 0,199	90	16	CU CT	0,43	0, 34	135	0,028
NYL60 3320	Черный	6-0	0,7	0,070– 0,099	70	10	CU RC	0,24	0, 19	135	0,027
NYL30	Черный	3-0	2	0,200–	70	26	CU	0,53	0, 42	135	0,028

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
3328				0,249			RC				
NYL30 3328SL	Черный	3-0	2	0,200- 0,249	35	26	CU RC	0,53	0,42	135	0,028
NYL20 3336	Черный	2-0	3	0,300- 0,349	70	45	CU RC	0,73	0,58	135	0,028
NYL20 3336SL	Черный	2-0	3	0,300- 0,349	35	45	CU RC	0,73	0,58	135	0,028
NYL10 3337	Черный	0-0	3,5	0,350- 0,399	70	45	CU RC	0,83	0,66	135	0,028
NYL01 3338	Черный	1-0	4	0,400- 0,499	100	45	HC RC	0,98	0,78	180	0,029
NYL10 3346	Черный	0-0	3,5	0,350- 0,399	100	40	HC RB	0,83	0,66	180	0,028
NYL01 3348	Черный	1-0	4	0,400- 0,499	150	48	HC RB LOOP	0,98	0,78	180	0,029
NYL10 3389	Черный	0-0	3,5	0,350- 0,399	70	60	ST CT	0,35	0,28	0	0,027
NYL100 3718	Черный	10-0	0,2	0,020- 0,029	38	6	CU SM	0,14	0,11	135	0,027
NYL100 3719	Черный	10-0	0,2	0,020- 0,029	38	6	CU SM DN	0,14	0,11	135	0,027
NYL30 3321	Черный	3-0	2	0,200- 0,249	70	16	CU CT	0,53	0,42	135	0,028

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
NYL10 3340	Черный	0-0	3,5	0,350–0,399	150	40	HC RB LOOP	0,83	0,66	180	0,028
NYL01 3347	Черный	1-0	4	0,400–0,499	100	40	HC RB	0,98	0,78	180	0,029
NYL90 3709	Черный	9-0	0,3	0,030–0,039	38	6	CU RB SN	0,14	0,11	135	0,027
NYL601601	Черный	6-0	0,7	0,070–0,099	45	10	CU RC	0,38	0,30	135	0,027
NYL501601	Черный	5-0	1	0,100–0,149	45	10	CU RC	0,38	0,30	135	0,027
NYL601610	Черный	6-0	0,7	0,070–0,099	45	11	CU RC	0,24	0,19	135	0,027
NYL501611	Черный	5-0	1	0,100–0,149	45	11	CU RC	0,38	0,30	135	0,027
NYL401612	Черный	4-0	1,5	0,150–0,199	45	11	CU RC	0,43	0,34	135	0,028
NYL601614	Черный	6-0	0,7	0,070–0,099	45	16	CU RC	0,24	0,19	135	0,027
NYL501618	Черный	5-0	1	0,100–0,149	45	19	CU RC	0,38	0,30	135	0,027
NYL401619	Голубой	4-0	1,5	0,150–0,199	75	19	CU RC	0,43	0,34	135	0,028
NYL401620	Голубой	4-0	1,5	0,150–	45	19	CU	0,43	0,34	135	0,028

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
	й			0,199			RC				
NYL301621	Голубой	3-0	2	0,200-0,249	45	19	CU RC	0,53	0,42	135	0,028
NYL601851	Черный	6-0	0,7	0,070-0,099	45	13	CU RC	0,24	0,19	135	0,027
NYL501852	Черный	5-0	1	0,100-0,149	45	13	CU RC	0,38	0,30	135	0,027
NYL401861	Черный	4-0	1,5	0,150-0,199	45	16	CU RC	0,43	0,34	135	0,028
NYL200568	Черный	2-0	3	0,300-0,349	100	31	HC RB	0,73	0,58	180	0,028
NYL100724	Черный	0-0	3,5	0,350-0,399	150	40	HC RB BL LOOP	0,83	0,66	180	0,028
NYL100739	Черный	0-0	3,5	0,350-0,399	150	31	HC RB	0,83	0,66	180	0,028
NYL100740	Черный	0-0	3,5	0,350-0,399	150	40	HC RB LOOP H	0,83	0,66	180	0,028
NYL100741	Черный	0-0	3,5	0,350-0,399	150	48	HC RB LOOP	0,83	0,66	180	0,028

Код для заказа (артикул)	а нити	ый номер, USP	й размер, EP	р нити, мм	нити, см (± 2%)	иглы, мм (± 1%)	иглы	иглы, мм (± 1%)	в зоне крепления шовной нити, мм (± 1%)	б иглы, град	притуплен ия рабочей части иглы, не более мм (± 1%)
NYL010745	Черный	1-0	4	0,400-0,499	100	31	HC RB	0,98	0,78	180	0,029
NYL300627	Черный	3-0	2	0,200-0,249	75	60	ST CT	0,53	0,42	0	0,028
NYL100777 0	Черный	10-0	0,2	0,020-0,029	13	6	CU SM	0,14	0,11	135	0,027
NYL100737	Черный	0-0	3,5	0,350-0,399	100	40	HC RC	0,83	0,66	180	0,028
NYL101030 80	Черный	0-0	3,5	0,350-0,399	100	80	CU CT	0,83	0,66	135	0,028
NYL101030 90	Черный	0-0	3,5	0,350-0,399	100	90	CU CT	0,83	0,66	135	0,028
NYL015955	Черный	1-0	4	0,400-0,499	100	40	HC RC	0,98	0,78	180	0,029
NYL020798	Черный	2-0	3	0,300-0,349	100	90	CU CT	1,20	0,96	135	0,029
NYL200664	Черный	2-0	3	0,300-0,349	45	26	CU RC	0,73	0,58	135	0,028
NYL501895 1	Голубой	5-0	1	0,100-0,149	45	15	CU CT	0,38	0,30	135	0,027
NYL015956	Черный	1-0	4	0,400-0,499	75	40	HC RC	0,98	0,78	180	0,029
NYL100906 0	Черный	10-0	0,2	0,020-0,029	38	6,4	CU SM	0,14	0,11	135	0,027
NYL501719	Голубой	5-0	1	0,100-0,149	90	13	CU TC	0,38	0,30	135	0,027

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, ЕР	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
NYL301625	Черный	3-0	2	0,200-0,249	90	26	CU RC	0,53	0,42	135	0,028
NYL010680	Черный	1-0	4	0,400-0,499	90	30	CU RC	0,98	0,78	135	0,029
NYL301622	Черный	3-0	2	0,200-0,249	90	19	CU RC	0,53	0,42	135	0,028
NYL201626	Черный	2-0	3	0,300-0,349	90	26	CU RC	0,73	0,58	135	0,028
NYL012797	Черный	1-0	4	0,400-0,499	90	90	CU RC	0,98	0,78	135	
NYL203232	Черный	2-0	3	0,300-0,349	90	30	CU RC	0,73	0,58	135	0,028
NYL601615	Черный	6-0	0,7	0,070-0,099	90	16	CU CT	0,24	0,19	135	0,027
NYL200795	Черный	2-0	3	0,300-0,349	90	90	CU RC	0,73	0,58	135	0,028
NYL200776	Черный	2-0	3	0,300-0,349	90	55	ST CT	0,73	0,58	0	0,028
NYL401618	Голубой	4-0	1,5	0,150-0,199	90	19	CU RC	0,43	0,34	135	0,028
NYL022407	Черный	2-0	3	0,300-0,349	75	40	HC RC	1,20	0,96	180	0,029

Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAMIDE без иглы

NYS20 903	Черный	2-0	3	0,300-0,349	76	-	-	-	-	-	-
NYS10 904	Черный	0-0	3,5	0,350-	76	-	-	-	-	-	-

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
				0,399							
NYS01 905	Черный	1-0	4	0,400-0,499	76	-	-	-	-	-	-
NYS02 906	Черный	2-0	3	0,300-0,349	76	-	-	-	-	-	-
Материал хирургический шовный не рассасывающийся с иглой FILAPROP											
PPL300621	Голубой	3-0	2	0,200-0,249	90	60	ST CT	0,53	0,42	0	0,028
PPL308849	Голубой	3-0	2	0,200-0,249	90	30	HC TC	0,53	0,42	180	0,028
PPL408015	Голубой	4-0	1,5	0,150-0,199	90	19	CU RC	0,43	0,34	180	0,028
PPL208850	Голубой	2-0	3	0,300-0,349	90	30	HC TC	0,73	0,58	180	0,028
PPL708801	Голубой	7-0	0,5	0,050-0,069	90	11	CU CT	0,20	0,16	135	0,027
PPL508010	Голубой	5-0	1	0,100-0,149	90	19	CU CT	0,38	0,30	135	0,027
PPL208689	Голубой	2-0	3	0,300-0,349	90	40	CU RC	0,73	0,58	135	0,028
PPL408875	Голубой	4-0	1,5	0,150-0,199	90	16	CU CT	0,43	0,34	135	0,028
PPL600523	Голубой	6-0	0,7	0,070-0,099	90	15	CU SM	0,24	0,19	135	0,027
PPL208937	Голубой	2-0	3	0,300-0,349	90	17	HC TC	0,73	0,58	180	0,028

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
PPL400539	Голубой	4-0	1,5	0,150-0,199	90	25	CUSM	0,43	0,34	135	0,028
PPL300626	Голубой	3-0	2	0,200-0,249	90	35	CUSM	0,53	0,42	135	0,028
PPL1001713	Голубой	10-0	0,2	0,020-0,029	90	16	STCT	0,14	0,11	0	0,027
PPL200987	Голубой	2-0	3	0,300-0,349	90	90	CURC	0,73	0,58	135	0,028
PPL408665	Голубой	4-0	1,5	0,150-0,199	90	13	HCTC	0,43	0,34	180	0,028
PPL408879	Голубой	4-0	1,5	0,150-0,199	90	25	CUCT	0,43	0,34	135	0,028
PPL508662	Голубой	5-0	1	0,100-0,149	90	8	CUTC	0,38	0,30	135	0,027
PPL018450	Голубой	1-0	4	0,400-0,499	90	45	HCTC	0,98	0,78	180	0,029
PPL102815	Голубой	0-0	3,5	0,350-0,399	90	30	CURC	0,83	0,66	135	0,028
PPL308392	Голубой	3-0	2	0,200-0,249	90	20	CUSM	0,53	0,42	135	0,028
PPL400835	Голубой	4-0	1,5	0,150-0,199	90	17	HCTC	0,43	0,34	135	0,028
PPL608873	Голубой	6-0	0,7	0,070-0,099	90	16	CUCT	0,24	0,19	135	0,027
PPL308731	Голубой	3-0	2	0,200-0,249	90	22	HRC	0,53	0,42	180	0,028

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Угол заточки иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
PPL508881	Голубой	5-0	1	0,100-0,149	90	25	CU CT	0,38	0,30	135	0,027
PPL508882	Голубой	5-0	1	0,100-0,149	90	16	CU RC	0,38	0,30	135	0,027
PPL102820	Голубой	0-0	3,5	0,350-0,399	90	26	HC RC	0,83	0,66	180	0,028
PPL208852	Голубой	2-0	3	0,300-0,349	90	40	HC TC	0,73	0,58	180	0,028
PPL500527	Голубой	5-0	1	0,100-0,149	90	15	CU SM	0,58	0,46	135	0,028
PPL108470	Голубой	0-0	3,5	0,350-0,399	90	40	HC RC	0,83	0,66	0,80	0,028
PPL018475	Голубой	1-0	4	0,400-0,499	90	50	HC RC	0,98	0,78	180	0,029
PPL400525	Голубой	4-0	1,5	0,150-0,199	90	15	CU SM	0,43	0,34	135	0,028
PPL100177 7	Голубой	10-0	0,2	0,020-0,029	90	6,3	CU SM	0,14	0,11	135	0,027
PPL408391	Голубой	4-0	1,5	0,150-0,199	90	20	CU SM	0,43	0,34	135	0,027
PPL102825	Голубой	0-0	3,5	0,350-0,399	90	36	HC RC	0,83	0,66	180	0,028
PPL508014	Голубой	5-0	1	0,100-0,149	90	19	CU RC	0,38	0,30	135	0,027
PPL902780	Голубой	8-0	0,4	0,040-0,049	90	4,8	CU RB	0,14	0,11	135	0,027

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, ЕР	Диаметр нити, мм	Длина нити, см (± 2%)	Длина иглы, мм (± 1%)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм (± 1%)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм (± 1%)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм (± 1%)
							DN				
PPL608000	Голубой	6-0	0,7	0,070-0,099	90	9	CU RC	0,24	0,19	135	0,027
PPL30 018	Голубой	3-0	2	0,200-0,249	70	22	CU CT	0,53	0,42	135	0,028
PPL30 800	Голубой	3-0	2	0,200-0,249	90	25	CU CT	0,53	0,42	135	0,028
PPL60 823	Голубой	6-0	0,7	0,070-0,099	70	15	CU CT	0,24	0,19	135	0,027
PPL30 825	Голубой	3-0	2	0,200-0,249	90	25	HC RB	0,53	0,42	180	0,028
PPL10 830	Голубой	0-0	3,5	0,350-0,399	70	30	HC RB	0,83	0,66	180	0,028
PPL01 834	Голубой	1-0	4	0,400-0,499	150	48	HC RB LOOP	0,98	0,78	180	0,029
PPL30 838	Голубой	3-0	2	0,200-0,249	70	25	HC RB	0,53	0,42	180	0,028
PPL01 840	Голубой	1-0	4	0,400-0,499	70	30	HC RB	0,98	0,78	180	0,029
PPL01 843	Голубой	1-0	4	0,400-0,499	70	40	HC RB	0,98	0,78	180	0,029
PPL20 844	Голубой	2-0	3	0,300-0,349	90	30	HC RB	0,73	0,58	180	0,028
PPL10 846	Голубой	0-0	3,5	0,350-	90	30	HC	0,83	0,66	180	0,028
	Окраска	Условн	Метрически	Диамет	Длина	Длина	Тип	Диаметр	Диаметр иглы	б	притуплен

Код для заказа (артикул)		номер, USP	EP	мм	см (± 2%)	мм (± 1%)		мм (± 1%)	крепления шовной нити, мм (± 1%)	иглы , град	ия рабочей части иглы, не более мм (± 1%)
	й			0,399			RB				
PPL40 849	Голубо й	4-0	1,5	0,150- 0,199	70	16	HC RB	0,43	0,34	180	0,028
PPL40 870	Голубо й	4-0	1,5	0,150- 0,199	70	16	CU CT	0,43	0,34	135	0,028
PPL60 878	Голубо й	6-0	0,7	0,070- 0,099	45	12	CU RC	0,24	0,19	135	0,027
PPL50 881	Голубо й	5-0	1	0,100- 0,149	70	16	CU RB	0,38	0,30	135	0,027
PPL50 882DN	Голубо й	5-0	1	0,100- 0,149	70	16	CU RB DN	0,38	0,30	135	0,027
PPL01 883	Голубо й	1-0	4	0,400- 0,499	100	45	HC RC	0,98	0,78	180	0,029
PPL30 887	Голубо й	3-0	2	0,200- 0,249	70	20	HC RB	0,53	0,42	180	0,028
PPL30 888	Голубо й	3-0	2	0,200- 0,249	70	60	ST CT	0,53	0,42	0	0,028
PPL50 889	Голубо й	5-0	1	0,100- 0,149	90	12	CU RC	0,38	0,30	135	0,027
PPL10 894	Голубо й	0-0	3,5	0,350- 0,399	90	30	HC TC	0,83	0,66	180	0,027
PPL60 895DN	Голубо й	6-0	0,7	0,070- 0,099	70	10	CU RB DN	0,24	0,19	135	0,027
PPL70 8702	Голубо	7-0	0,5	0,050-	60	9	CU	0,20	0,16	135	0,029

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
	й			0,069			RB DNC 1				
PPL70 8704	Голубой	7-0	0,5	0,050–0,069	60	9	CU CT DN	0,20	0,16	135	0,029
PPL70 866ML	Голубой	2-0	3	0,300–0,349	60	8	CU RB DN	1,20	0,96	135	0,029
PPL80 876ML	Голубой	2-0	3	0,300–0,349	60	8	CU RB DN	1,20	0,96	135	0,029
PPL70 804	Голубой	7-0	0,5	0,050–0,069	60	8	CU CT DN	0,20	0,16	135	0,027
PPL70 811	Голубой	7-0	0,5	0,050–0,069	60	6	CU RB DN	0,20	0,16	135	0,027
PPL80 812	Голубой	8-0	0,4	0,040–0,049	60	6	CU RB DNT N	0,14	0,11	135	0,027
PPL80 813	Голубой	8-0	0,4	0,040–0,049	60	9	CU RB DN	0,14	0,11	135	0,027
			0,7	0,070–	60	13	CU	0,24	0,19	135	0,027

Код для заказа (артикул)	а нити	ый номер, USP	й размер, EP	р нити, мм	нити, см (± 2%)	иглы, мм (± 1%)	иглы	иглы, мм (± 1%)	в зоне крепления шовной нити, мм (± 1%)	б иглы , град	притуплен ия рабочей части иглы, не более мм (± 1%)
	й			0,099			RB DN				
PPL60 829	Голубо й	6-0	0,7	0,070- 0,099	70	13	CU RB DN	0,24	0,19	135	0,027
PPL50 856	Голубо й	5-0	1	0,100- 0,149	90	16	HCR B DNC 2	0,38	0,30	135	0,027
PPL70 866	Голубо й	7-0	0,5	0,050- 0,069	60	8	CU RB DNN 1	0,20	0,16	135	0,027
PPL40 867	Голубо й	4-0	1,5	0,150- 0,199	90	25	HC TC DNC 1	0,43	0,34	135	0,028
PPL60 872	Голубо й	6-0	0,7	0,070- 0,099	60	9	CU RB DNC 1	0,24	0,19	135	0,027
PPL70 873	Голубо й	7-0	0,5	0,050- 0,069	60	9	CU RB DNC 2	0,20	0,16	135	0,027
PPL80 876	Голубо	8-0	0,4	0,040-	60	8	CU	0,14	0,11	135	0,027

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
	й			0,049			RB DNT N				
PPL60 893	Голубой	6-0	0,7	0,070-0,099	70	8	CU RB DN	0,24	0,19	135	0,027
PPG50 810	Голубой	5-0	1	0,100-0,149	75	13	HCR B DNT P	0,38	0,30	135	0,027
PPG40 846	Голубой	4-0	1,5	0,150-0,199	90	17	HCR B DNT P	0,43	0,34	180	0,028
PPL70 8701	Голубой	7-0	0,5	0,050-0,069	45	9	CU RB DN	0,20	0,16	135	0,027
PPL60 8726	Голубой	6-0	0,7	0,070-0,099	60	13	CUR B DNT N	0,24	0,19	135	0,027
PPL80 8732	Голубой	8-0	0,4	0,040-0,049	60	6	CU RB DN	0,14	0,11	135	0,027
PPL70 8735	Голубой	7-0	0,5	0,050-0,069	60	8	CU RB	0,20	0,16	135	0,027

Код для заказа (артикул)	а нити	ый номер, USP	й размер, EP	р нити, мм	нити, см (± 2%)	иглы, мм (± 1%)	иглы	иглы, мм (± 1%)	в зоне крепления шовной нити, мм (± 1%)	б иглы, град	притуплен ия рабочей части иглы, не более мм (± 1%)
							DN				
PPL80 8741	Голубо й	8-0	0,4	0,040–0,049	60	8	CU RB DNT H	0,14	0,11	135	0,027
PPL60 8805	Голубо й	6-0	0,7	0,070–0,099	60	9	CU RB DNC 2	0,24	0,19	135	0,027
PPL40 8845	Голубо й	4-0	1,5	0,150–0,199	90	25	HC TC DNC 2	0,43	0,34	180	0,028
PPL40 8935	Голубо й	4-0	1,5	0,150–0,199	90	17	HC TC DN	0,43	0,34	180	0,028
PPL60 8307BL	Голубо й	6-0	0,7	0,070–0,099	60	13	CUR B DNV B	0,24	0,19	135	0,027
PPL60 8597	Голубо й	6-0	0,7	0,070–0,099	60	11	CU RB DN	0,24	0,19	135	0,027
PPL80 8101BL	Голубо й	8-0	0,4	0,040–0,049	60	8	CU CT VB D	0,14	0,11	135	0,027

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
PPL60 8718	Голубой	6-0	0,7	0,070-0,099	60	13	CUR B DNT H	0,24	0,19	135	0,027
PPL50 8556	Голубой	5-0	1	0,100-0,149	90	16	HCR B DNC 1	0,38	0,30	180	0,027
PPL60 8726BL	Голубой	6-0	0,7	0,070-0,099	60	13	CU RB DVB	0,24	0,19	135	0,027
PPL60 8726BX	Голубой	6-0	0,7	0,070-0,099	75	13	CU RB DVB	0,24	0,19	135	0,027
PPL20 8977	Голубой	2-0	3	0,300-0,349	90	26	HC TC DN	0,73	0,58	180	0,028
PPL20 8937	Голубой	2-0	3	0,300-0,349	90	17	HC TC DN	0,73	0,58	180	0,028
PPL30 8522	Голубой	3-0	2	0,200-0,249	90	26	HC RB DN	0,53	0,42	180	0,028
PPL30 8936	Голубой	3-0	2	0,200-0,249	90	17	HC RB DN	0,53	0,42	180	0,028

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, ЕР	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Угол, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
PPL40 8521	Голубой	4-0	1,5	0,150-0,199	90	26	HC RB DN	0,43	0,34	180	0,028
PPL50 8721	Голубой	5-0	1	0,100-0,149	75	13	CU RB DN	0,38	0,30	135	0,027
PPL50 8803	Голубой	5-0	1	0,100-0,149	60	10	HC RB DN	0,38	0,30	180	0,027
PPL50 8205	Голубой	5-0	1	0,100-0,149	60	13	HC RB DN	0,38	0,30	180	0,027
PPL60 8726XL	Голубой	6-0	0,7	0,070-0,099	75	13	CU RB DN	0,24	0,19	135	0,027
PPL70 8078	Голубой	7-0	0,5	0,050-0,069	60	8	CU RB DNN 2	0,20	0,16	135	0,027
PPL80 8088	Голубой	8-0	0,4	0,040-0,049	60	8	CU RB DN	0,14	0,11	135	0,027
PPL80 8086XF	Голубой	8-0	0,4	0,040-0,049	60	6	CU RB DNT H	0,14	0,11	135	0,027

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
PPL70 8070	Голубой	7-0	0,5	0,050–0,069	60	10	CURB DN	0,20	0,16	135	0,027
PPL70 8078BL	Голубой	7-0	0,5	0,050–0,069	60	8	CURB DNV B	0,20	0,16	135	0,027
PPL60 8804	Голубой	6-0	0,7	0,070–0,099	60	10	CURB DN	0,24	0,19	135	0,027
PPL60 8804BX	Голубой	6-0	0,7	0,070–0,099	60	10	CURB DVB	0,24	0,19	135	0,027
PPL50 8710	Голубой	5-0	1	0,100–0,149	75	13	HCURB DN	0,38	0,30	180	0,027
PPL40 8557	Голубой	4-0	1,5	0,150–0,199	90	16	HCURB DN	0,43	0,34	180	0,028
PPL50 8802BX	Голубой	5-0	1	0,100–0,149	75	11	CURB DVB	0,38	0,30	180	0,027
PPL60 8802	Голубой	6-0	0,7	0,070–0,099	60	11	CUCT DN	0,24	0,19	135	0,027
PPL802775	Голубой	8-0	0,4	0,040–	13	6	CU	0,14	0,11	135	0,027

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, ЕР	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Игла, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
	й			0,049			RB				
PPL802777	Голубой	8-0	0,4	0,040–0,049	45	6	CU RB DN	0,14	0,11	135	0,027
PPL708304	Голубой	7-0	0,5	0,050–0,069	60	9	CU RB DN	0,20	0,16	135	0,027
PPL408355	Голубой	4-0	1,5	0,150–0,199	90	26	HC RB	0,43	0,34	180	0,028
PPL408557	Голубой	4-0	1,5	0,150–0,199	90	17	HC RB	0,43	0,34	180	0,028
PPL308558	Голубой	3-0	2	0,200–0,249	90	17	HC RB	0,43	0,34	180	0,028
PPL508663	Голубой	5-0	1	0,100–0,149	60	9	CU CT DN	0,38	0,30	135	0,027
PPL508664	Голубой	5-0	1	0,100–0,149	60	13	HC CT DN	0,38	0,30	180	0,027
PPL408666	Голубой	4-0	1,5	0,150–0,199	75	13	HC CT DN	0,43	0,34	180	0,028
PPL308667	Голубой	3-0	2	0,200–0,249	90	16	HC CT DN	0,53	0,42	180	0,028
PPL808703	Голубой	8-0	0,4	0,040–	60	9	CU	0,14	0,11	135	0,027

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, ЕР	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
	й			0,049			CT DNV				
PPL708704	Голубой	7-0	0,5	0,050–0,069	60	9	CU CT DN	0,20	0,16	135	0,027
PPL608706	Голубой	6-0	0,7	0,070–0,099	75	13	CU CT DNV	0,24	0,19	135	0,027
PPL608707	Голубой	6-0	0,7	0,070–0,099	60	13	CU CT DN	0,24	0,19	135	0,027
PPL508710	Голубой	5-0	1	0,100–0,149	75	13	HC RB	0,38	0,30	180	0,027
PPL508721	Голубой	5-0	1	0,100–0,149	75	13	CU CT DN	0,38	0,30	135	0,027
PPL708725	Голубой	7-0	0,5	0,050–0,069	60	13	CU RB DN	0,20	0,16	135	0,027
PPL408761	Голубой	4-0	1,5	0,150–0,199	90	20	HC RB	0,43	0,34	180	0,028
PPL308770	Голубой	3-0	2	0,200–0,249	75	22	HC RB	0,53	0,42	180	0,028
PPL708802	Голубой	7-0	0,5	0,050–0,069	60	11	CU CT DN	0,20	0,16	135	0,027

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
PPL508804	Голубой	5-0	1	0,100-0,149	60	11	HC CT DN	0,38	0,30	180	0,027
PPL608807	Голубой	6-0	0,7	0,070-0,099	60	9	CU CT DN	0,24	0,19	135	0,027
PPL708813	Голубой	7-0	0,5	0,050-0,069	60	13	CU CT DN	0,20	0,16	135	0,027
PPL608814	Голубой	6-0	0,7	0,070-0,099	75	13	CU CT DN	0,24	0,19	135	0,027
PPL608815	Голубой	6-0	0,7	0,070-0,099	60	13	HC CT DN	0,24	0,19	135	0,027
PPL508816	Голубой	5-0	1	0,100-0,149	75	13	HC CT DN	0,38	0,30	135	0,027
PPL408840	Голубой	4-0	1,5	0,150-0,199	90	20	HC CT DN	0,43	0,34	180	0,028
PPL408845	Голубой	4-0	1,5	0,150-0,199	90	26	HC CT DN	0,43	0,34	180	0,028
PPL508890	Голубой	5-0	1	0,100-0,149	75	13	CU RB	0,38	0,30	135	0,027

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
PPL308936	Голубой	3-0	2	0,200-0,249	90	17	HC CT DN	0,53	0,42	180	0,028
PPL308976	Голубой	3-0	2	0,200-0,249	90	26	HC CT DN	0,53	0,42	180	0,028
PPL108434	Голубой	0-0	3,5	0,350-0,399	75	40	HC RB	0,83	0,66	180	0,028
PPL208523	Голубой	2-0	3	0,300-0,349	90	26	HC RB	0,73	0,58	180	0,028
PPL508557	Голубой	5-0	1	0,100-0,149	90	17	HC RB	0,38	0,30	180	0,027
PPL608617	Голубой	6-0	0,7	0,070-0,099	45	13	CU SM	0,24	0,19	135	0,027
PPL408634	Голубой	4-0	1,5	0,150-0,199	45	16	CU SM	0,43	0,34	135	0,028
PPL308665	Голубой	3-0	2	0,200-0,249	45	19	CU RC	0,53	0,42	135	0,028
PPL308684	Голубой	3-0	2	0,200-0,249	45	24	CU RC	0,53	0,42	135	0,028
PPL608697	Голубой	6-0	0,7	0,070-0,099	45	11	CU SM	0,24	0,19	135	0,027
PPL508698	Голубой	5-0	1	0,100-0,149	45	13	CU RC	0,38	0,30	135	0,027
PPL308832	Голубой	3-0	2	0,200-0,249	75	26	HC RB	0,53	0,42	180	0,028

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, ЕР	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Угол, град	притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
PPL208833	Голубой	2-0	3	0,300-0,349	75	26	HC RB	0,73	0,58	180	0,028
PPL018435	Голубой	1-0	4	0,400-0,499	100	40	HC RB	0,98	0,78	180	0,029
PPL108424	Голубой	0-0	3,5	0,350-0,399	75	37	HC RB	0,83	0,66	180	0,028
PPL308687	Голубой	3-0	2	0,200-0,249	75	19	CU RC	0,53	0,42	135	0,028
PPL208685	Голубой	2-0	3	0,300-0,349	75	24	CU RC	0,73	0,58	135	0,028
PPL208977	Голубой	2-0	3	0,300-0,349	75	26	HC CT	0,73	0,58	180	0,028
PPL100830	Голубой	0-0	3,5	0,350-0,399	75	30	HC RB	0,83	0,66	180	0,028
PPL408682	Голубой	4-0	1,5	0,150-0,199	45	19	CU RC	0,43	0,34	135	0,028
PPL508756	Голубой	5-0	1	0,100-0,149	90	17	HC RB DN	0,38	0,30	180	0,027
PPL408683	Голубой	4-0	1,5	0,150-0,199	45	20	CU RC	0,43	0,34	135	0,028
PPL309556	Голубой	3-0	2	0,200-0,249	90	20	HC RB TRO DN	0,53	0,42	180	0,028
PPL309557	Голубой	3-0	2	0,200-	90	20	HC	0,53	0,42	180	0,028

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
	й			0,249			RB TC DN				
PPL408204	Голубой	4-0	1,5	0,150-0,199	90	13	HC RB DN	0,43	0,34	180	0,028
PPL408861	Голубой	4-0	1,5	0,150-0,199	90	18	CU RB DN	0,43	0,34	135	0,028
PPL608776	Голубой	6-0	0,7	0,070-0,099	75	12	CU RB DN	0,24	0,19	135	0,027
PPL308833	Голубой	3-0	2	0,200-0,249	90	26	HC RB TRO DN	0,53	0,42	180	0,028
PPL608714	Голубой	6-0	0,7	0,070-0,099	75	13	CU RB DN	0,24	0,19	180	0,027
PPL508757	Голубой	5-0	1	0,100-0,149	90	16	HC RB TC DN	0,38	0,30	180	0,027
PPL802774	Голубой	8-0	0,4	0,040-0,049	75	6	CU RB	0,14	0,11	135	0,027
PPL100279	Голубой	10-0	0,2	0,020-	13	6	CU	0,14	0,11	135	0,027

Код для заказа (артикул)	а н и т и	вып номер, USP	и размер, ЕР	р н и т и, мм	н и т и, см (± 2%)	н и т и, мм (± 1%)	н и т и, мм (± 1%)	н и т и, мм (± 1%)	крепления шовной нити, мм (± 1%)	иглы , град	ия рабочей части иглы, не более мм (± 1%)
5	й			0,029			RB				
PPL202082 76	Голубо й	2-0	3	0,300- 0,349	75	75	HC RB	0,73	0,58	180	0,028
PPL108454	Голубо й	0-0	3,5	0,350- 0,399	75	48	HC CT	0,83	0,66	180	0,028
PPL608708	Голубо й	6-0	0,7	0,070- 0,099	90	13	CU CT	0,24	0,19	135	0,027
PPL508722	Голубо й	5-0	1	0,100- 0,149	90	13	CU TC	0,38	0,30	135	0,027
PPL308559	Голубо й	3-0	2	0,200- 0,249	90	16	HC RB	0,53	0,42	180	0,028
PPL200752	Голубо й	2-0	3	0,300- 0,349	90	75	ST CT	0,73	0,58	0	0,028
PPL508006	Голубо й	5-0	1	0,100- 0,149	90	16	CU CT	0,38	0,30	135	0,027
PPL408841	Голубо й	4-0	1,5	0,150- 0,199	90	20	HC TC	0,43	0,34	180	0,028
PPL608806	Голубо й	6-0	0,7	0,070- 0,099	90	9	CU CT	0,24	0,19	135	0,027
PPL808704	Голубо й	8-0	0,4	0,040- 0,049	90	8,8	CU CT DN	0,14	0,11	135	0,027
PPL608802	Голубо й	6-0	0,7	0,070- 0,099	90	11	CU CT	0,24	0,19	135	0,027
PPL308977	Голубо й	3-0	2	0,200- 0,249	90	25	HC TC	0,53	0,42	180	0,028

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
PPL200623	Голубой	2-0	3	0,300-0,349	90	60	ST CT	0,73	0,58	0	0,028
PPL012989	Голубой	1-0	4	0,400-0,499	90	90	CU CT	0,98	0,78	135	0,029
PPL308525	Голубой	3-0	2	0,200-0,249	90	30	HC RB	0,53	0,42	180	0,028
PPL408020	Голубой	4-0	1,5	0,150-0,199	90	26	CU CT	0,43	0,34	135	0,028
PPL308549	Голубой	3-0	2	0,200-0,249	90	16	CU RC	0,53	0,42	135	0,028
PPL308685	Голубой	3-0	2	0,200-0,249	90	26	CU RC	0,53	0,42	135	0,028

Материал хирургический шовный не рассасывающийся с иглой FILASILK

SLK100792	Черный	0-0	3,5	0,350-0,399	90	90	CU RC	0,83	0,66	135	0,028
SLK400536	Черный	4-0	1,5	0,150-0,199	90	25	CU SM	0,43	0,34	135	0,028
SLK600529	Черный	6-0	0,7	0,070-0,099	90	15	CU SM	0,24	0,19	135	0,027
SLK200367	Черный	2-0	3	0,300-0,349	90	20	CU RC	0,73	0,58	135	0,028
SLK020794	Черный	2-0	3	0,300-0,349	90	90	CU RC	0,20	0,16	135	0,027
SLK200790	Черный	2-0	3	0,300-0,349	90	60	ST CT	0,73	0,58	0	0,028
SLK500581	Черный	5-0	1	0,100-	90	16	CU	0,38	0,30	135	0,027

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Диаметр нити, мм	Длина нити, см (± 2%)	Длина иглы, мм (± 1%)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм (± 1%)	В зоне крепления шовной нити, мм (± 1%)	Б иглы , град	Притуплен ия рабочей части иглы, не более мм (± 1%)
				0,149			RB				
SLK300672	Черный	3-0	2	0,200- 0,249	90	20	CU SM	0,53	0,42	135	0,028
SLK500528	Черный	5-0	1	0,100- 0,149	90	15	CU SM	0,38	0,30	135	0,027
SLK100789	Черный	0-0	3,5	0,350- 0,399	90	60	ST CT	0,83	0,66	0	0,028
SLK100552	Черный	0-0	3,5	0,350- 0,399	90	50	HC RC	0,83	0,66	180	0,028
SLK300622	Черный	3-0	2	0,200- 0,249	90	60	ST CT	0,53	0,42	0	0,028
SLK800818	Черный	8-0	0,4	0,040- 0,049	90	8	HC RC	0,14	0,11	180	0,027
SLK400606	Черный	4-0	1,5	0,150- 0,199	90	15	CU SM	0,43	0,34	135	0,028
SLK300765	Черный	3-0	2	0,200- 0,249	90	75	ST CT	0,53	0,42	0	0,028
SLK400524	Черный	4-0	1,5	0,150- 0,199	90	15	HC SM	0,43	0,34	180	0,028
SLK400671	Черный	4-0	1,5	0,150- 0,199	90	20	CU SM	0,43	0,34	135	0,028
SLK300379	Черный	3-0	2	0,200- 0,249	90	25	HC RC	0,53	0,42	180	0,028
SLK907059	Черный	9-0	0,3	0,030- 0,039	90	6	CU SM	0,14	0,11	135	0,027
SLK600593	Черный	6-0	0,7	0,070-	90	9	CU	0,24	0,19	135	0,027

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
				0,099			RB				
SLK300576	Черный	3-0	2	0,200-0,249	90	25	FE RB	0,53	0,42	225	0,028
SLK012233	Черный	1-0	4	0,400-0,499	90	26	CU RC	0,98	0,78	135	
SLK400377	Черный	4-0	1,5	0,150-0,199	90	20	HC RC	0,43	0,34	180	0,028
SLK500595	Черный	5-0	1	0,100-0,149	90	10	CU RB	0,38	0,30	135	0,027
SLK100371	Черный	0-0	3,5	0,350-0,399	90	35	CU RC	0,83	0,66	135	0,028
SLK40 5000	Черный	4-0	1,5	0,150-0,199	90	16	CU CT	0,43	0,34	135	0,028
SLK30 5003	Черный	3-0	2	0,200-0,249	90	16	CU CT	0,53	0,42	135	0,028
SLK30 5028	Черный	3-0	2	0,200-0,249	76	26	CU RC	0,53	0,42	135	0,028
SLK20 5036	Черный	2-0	3	0,300-0,349	76	45	CU RC	0,73	0,58	135	0,028
SLK10 5037	Черный	0-0	3,5	0,350-0,399	76	45	CU RC	0,83	0,66	135	0,028
SLK40 5050	Черный	4-0	1,5	0,150-0,199	90	16	HC RB	0,43	0,34	180	0,028
SLK20 5052	Черный	2-0	3	0,300-0,349	76	50	HC RC	0,73	0,58	180	0,028

Код для заказа (артикул)	а нити	ый номер, USP	й размер, EP	р нити, мм	нити, см (± 2%)	иглы, мм (± 1%)	иглы	иглы, мм (± 1%)	в зоне крепления шовной нити, мм (± 1%)	б иглы , град	притуплен ия рабочей части иглы, не более мм (± 1%)
SLK01 5062	Черный	1-0	4	0,400- 0,499	76	60	CU CT	0,98	0,78	135	
SLK50 5079	Черный	5-0	1	0,100- 0,149	90	12	CU RC	0,38	0,30	135	0,027
SLK40 5082	Черный	4-0	1,5	0,150- 0,199	76	16	CU RB	0,43	0,34	135	0,028
SLK30 5085	Черный	3-0	2	0,200- 0,249	90	25	HC RB	0,53	0,42	180	0,028
SLK40 5086	Черный	4-0	1,5	0,150- 0,199	76	20	HC RB	0,43	0,34	180	0,028
SLK30 5087	Черный	3-0	2	0,200- 0,249	76	20	HC RB	0,53	0,42	180	0,028
SLK20 5331	Черный	2-0	3	0,300- 0,349	90	30	HC RB	0,73	0,58	180	0,028
SLK10 5332	Черный	0-0	3,5	0,350- 0,399	90	30	HC RB	0,83	0,66	180	0,028
SLK20 5670	Черный	2-0	3	0,300- 0,349	76	25	HC TC	0,73	0,58	180	0,028
SLK012243	Черный	1-0	4	0,400- 0,499	75	30	CU CT	0,98	0,78	135	0,029
SLK020936	Черный	2-0	3	0,300- 0,349	90	40	HC RB	1,20	0,96	180	0,029
SLK102223	Черный	0-0	3,5	0,350- 0,399	75	30	HC RC	0,83	0,66	180	0,028
SLK100373	Черный	0-0	3,5	0,350- 0,399	45	23	HC RC	0,83	0,66	180	0,028

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
SLK101050 39	Черный	0-0	3,5	0,350–0,399	75	39	CU CT	0,83	0,66	135	0,028
SLK200333	Черный	2-0	3	0,300–0,349	75	30	HC RB	0,73	0,58	180	0,028
SLK010723	Черный	1-0	4	0,400–0,499	75	30	HC RB	0,98	0,78	180	0,029
SLK100334	Черный	0-0	3,5	0,350–0,399	75	30	HC RB	0,83	0,66	180	0,028
SLK200737	Черный	2-0	3	0,300–0,349	45	23	HC RC	0,73	0,58	180	0,028
SLK101050 24	Черный	0-0	3,5	0,350–0,399	75	24	CU RC	0,83	0,66	135	0,028
SLK010338	Черный	1-0	4	0,400–0,499	75	37	HC RB	0,83	0,66	135	0,028
SLK100791	Черный	0-0	3,5	0,350–0,399	90	75	ST CT	0,83	0,66	0	0,028
SLK100337	Черный	0-0	3,5	0,350–0,399	75	37	HC RB	0,83	0,66	180	0,028
SLK202052 22	Черный	2-0	3	0,300–0,349	75	22	HC RB	0,73	0,58	180	0,028
SLK300684	Черный	3-0	2	0,200–0,249	75	24	CU RC	0,53	0,42	180	0,028
SLK305460 1	Черный	3-0	2	0,200–0,249	75	17	HC RB	0,53	0,42	180	0,028
SLK010339	Черный	1-0	4	0,400–0,499	90	40	HC RB	0,98	0,78	180	0,029

Код для заказа (артикул)	а нити	ый номер, USP	й размер, EP	р нити, мм	нити, см (± 2%)	иглы, мм (± 1%)	иглы	иглы, мм (± 1%)	в зоне крепления шовной нити, мм (± 1%)	иглы , град	ия рабочей части иглы, не более мм (± 1%)
SLK200327	Черный	2-0	3	0,300- 0,349	75	26	HC RB	0,73	0,58	180	0,028
SLK205610	Черный	2-0	3	0,300- 0,349	75	17	HC RB	0,73	0,58	180	0,028
SLK202052 25	Черный	2-0	3	0,300- 0,349	75	25	HC CT	0,73	0,58	180	0,028
SLK011517 5	Черный	1-0	4	0,400- 0,499	75	27	HC RB	0,98	0,78	180	0,029
SLK100383	Черный	0-0	3,5	0,350- 0,399	75	26	HC RB	0,83	0,66	180	0,028
SLK300587	Черный	3-0	2	0,200- 0,249	75	22	HC RB	0,53	0,42	180	0,028
SLK205208	Черный	2-0	3	0,300- 0,349	75	51	ST CT	0,73	0,58	0	0,028
SLK200766	Черный	2-0	3	0,300- 0,349	75	75	ST CT	0,73	0,58	0	0,028
SLK300675	Черный	3-0	2	0,200- 0,249	75	30	CU RC	0,53	0,42	135	0,028
SLK300832	Черный	3-0	2	0,200- 0,249	75	26	HC RB	0,53	0,42	180	0,028
SLK200503	Черный	2-0	3	0,300- 0,349	90	15	CU RC	0,73	0,58	136	0,028
SLK300571	Черный	3-0	2	0,200- 0,249	75	30	HC RB	0,53	0,42	180	0,028
SLK300632	Черный	3-0	2	0,200- 0,249	45	21	HC RC	0,53	0,42	180	0,028

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
SLK202052 221	Черный	2-0	3	0,300-0,349	75	22	HC CT	0,73	0,58	180	0,028
SLK300882	Черный	3-0	2	0,200-0,249	75	16	CU RC	0,53	0,42	135	0,028
SLK303053 45	Черный	3-0	2	0,200-0,249	45	15	HC RC	0,53	0,42	180	0,028
SLK303053 25	Черный	3-0	2	0,200-0,249	75	25	CU SM	0,53	0,42	135	0,028
SLK302508	Черный	3-0	2	0,200-0,249	75	22	HC CT	0,53	0,42	180	0,028
SLK202052 90	Черный	2-0	3	0,300-0,349	90	20	HC RB	0,73	0,58	180	0,028
SLK300577	Черный	3-0	2	0,200-0,249	75	25	HC CT	0,53	0,42	180	0,028
SLK300883	Черный	3-0	2	0,200-0,249	45	16	CU RC	0,53	0,42	135	0,028
SLK301684	Черный	3-0	2	0,200-0,249	75	24	CU CT	0,53	0,42	135	0,028
SLK303053 19	Черный	3-0	2	0,200-0,249	75	19	CU RB	0,53	0,42	135	0,028
SLK801822	Черный	8-0	0,4	0,040-0,049	30	6	CU SM	0,14	0,11	135	0,027
SLK202052 10	Черный	2-0	3	0,300-0,349	75	10	CU RB	0,73	0,58	135	0,028
SLK303053 90	Черный	3-0	2	0,200-0,249	90	12	HC RB	0,53	0,42	180	0,028

Код для заказа (артикул)	а нити	ый номер, USP	й размер, EP	р нити, мм	нити, см (± 2%)	иглы, мм (± 1%)	иглы	иглы, мм (± 1%)	в зоне крепления шовной нити, мм (± 1%)	б иглы , град	притуплен ия рабочей части иглы, не более мм (± 1%)
SLK400629	Черный	4-0	1,5	0,150- 0,199	75	24	CU RC	0,43	0,34	135	0,028
SLK303053 15	Черный	3-0	2	0,200- 0,249	75	15	CU RB	0,53	0,42	135	0,028
SLK400537	Черный	4-0	1,5	0,150- 0,199	75	24	CU CT	0,43	0,34	135	0,028
SLK202052 151	Черный	2-0	3	0,300- 0,349	75	15	CU RB	0,73	0,58	135	0,028
SLK400683	Черный	4-0	1,5	0,150- 0,199	75	19	CU CT	0,43	0,34	135	0,028
SLK300588	Черный	3-0	2	0,200- 0,249	90	20	HC RB	0,53	0,42	180	0,028
SLK400736	Черный	4-0	1,5	0,150- 0,199	45	12	CU RC	0,43	0,34	135	0,028
SLK505055 15	Черный	5-0	1	0,100- 0,149	45	15	HC RC	0,38	0,30	180	0,027
SLK808058 30	Черный	8-0	0,4	0,040- 0,049	30	6	CU SM DN	0,14	0,11	135	0,027
SLK303053 10	Черный	3-0	2	0,200- 0,249	75	10	CU RB	0,53	0,42	135	0,028
SLK400734	Черный	4-0	1,5	0,150- 0,199	90	15	CU RC	0,43	0,34	135	0,028
SLK404054 10	Черный	4-0	1,5	0,150- 0,199	75	10	CU RB	0,43	0,34	135	0,028
SLK500545	Черный	5-0	1	0,100-	45	17	HC	0,43	0,34	180	0,028

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, ЕР	Диаметр нити, мм	Длина нити, см (± 2%)	Длина иглы, мм (± 1%)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм (± 1%)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм (± 1%)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм (± 1%)
				0,149			RB				
SLK400586	Черный	4-0	1,5	0,150-0,199	75	21	HC CT	0,43	0,34	180	0,028
SLK400684	Черный	4-0	1,5	0,150-0,199	45	19	CU RC	0,43	0,34	135	0,028
SLK505055 21	Черный	5-0	1	0,100-0,149	45	21	HC RC	0,38	0,30	180	0,027
SLK601732	Черный	6-0	0,7	0,070-0,099	45	9	CU SM	0,24	0,19	135	0,027
SLK601675	Черный	6-0	0,7	0,070-0,099	45	16	CU RC	0,24	0,19	135	0,027
SLK500580	Черный	5-0	1	0,100-0,149	45	16	CU RC	0,38	0,30	135	0,027
SLK500640	Черный	5-0	1	0,100-0,149	45	12	CU RC	0,38	0,30	135	0,027
SLK500682	Черный	5-0	1	0,100-0,149	45	19	CU RC	0,38	0,30	135	0,027
SLK402510	Черный	4-0	1,5	0,150-0,199	75	26	HC CT	0,43	0,34	180	0,028
SLK107921	Черный	0-0	3,5	0,350-0,399	100	80	CU CT	0,83	0,66	135	0,028
SLK012793	Черный	1-0	4	0,400-0,499	100	90	CU CT	0,98	0,78	135	0,029
SLK200791	Черный	2-0	3	0,300-0,349	100	90	CU CT	0,73	0,58	135	0,028
SLK200685	Черный	2-0	3	0,300-	45	26	CU	0,73	0,58	135	0,028

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, ЕР	Диаметр нити, мм	Длина нити, см (± 2%)	Длина иглы, мм (± 1%)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм (± 1%)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм (± 1%)	Угол, град	притупления рабочей части иглы, не более мм (± 1%)
				0,349			RC				
SLK300537	Черный	3-0	2	0,200-0,249	45	25	CU RB	0,53	0,42	135	0,028
SLK101050 76	Черный	0-0	3,5	0,350-0,399	75	45	CU RC	0,83	0,66	135	0,028
SLK200584	Черный	2-0	3	0,300-0,349	75	40	HC RB	0,73	0,58	180	0,028
SLK202052 31	Черный	2-0	3	0,300-0,349	75	30	HC CT	0,73	0,58	180	0,028
SLK200667	Черный	2-0	3	0,300-0,349	90	35	CU RC	0,73	0,58	135	0,028
SLK801819	Черный	8-0	0,4	0,040-0,049	90	6,5	CU SM DN	0,14	0,11	135	0,027
SLK300666	Черный	3-0	2	0,200-0,249	90	35	CU RC	0,53	0,42	135	0,028
SLK700817	Черный	7-0	0,5	0,050-0,069	90	8	CU SM DN	0,20	0,16	135	0,027
SLK600815	Черный	6-0	0,7	0,070-0,099	90	11	CU SM	0,24	0,19	135	0,027
SLK207911	Черный	2-0	3	0,300-0,349	90	80	CU CT	0,73	0,58	135	0,028
SLK302231	Черный	3-0	2	0,200-0,249	90	19	CU RC	0,53	0,42	135	0,028
SLK102508	Черный	0-0	3,5	0,350-	90	30	CU	0,83	0,66	135	0,028

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, ЕР	Диаметр нити, мм	Длина нити, см (± 2%)	Длина иглы, мм (± 1%)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм (± 1%)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм (± 1%)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм (± 1%)
				0,399			PRC				
Материал хирургический шовный не рассасывающийся MERICRON XL с иглой											
ME206664	Зеленый	2-0	3	0,300-0,349	90	26	CU RC	0,73	0,58	135	0,028
ME406891	Зеленый	4-0	1,5	0,150-0,199	90	13	CU RB	0,43	0,34	135	0,028
ME0132050	Зеленый	1-0	4	0,400-0,499	90	36	HC RC	0,98	0,78	180	0,029
ME012991	Зеленый	1-0	4	0,400-0,499	90	90	CU RC	0,98	0,78	135	0,029
ME200095	Зеленый	2-0	3	0,300-0,349	90	25	CU TC	0,73	0,58	135	0,028
ME0132039	Зеленый	1-0	4	0,400-0,499	90	30	CU RC	0,98	0,78	180	0,029
ME500883	Зеленый	5-0	1	0,100-0,149	90	8	HC SM	0,38	0,30	180	0,027
ME0132047	Зеленый	1-0	4	0,400-0,499	90	30	HC RC	0,98	0,78	180	0,029
ME306683	Зеленый	3-0	2	0,200-0,249	90	19	CU RC	0,53	0,42	135	0,028
ME506890	Зеленый	5-0	1	0,100-0,149	90	13	CU RB	0,38	0,30	135	0,027
ME100979	Зеленый	0-0	3,5	0,350-0,399	90	50	HC TC	0,83	0,66	180	0,028
ME306759	Зеленый	3-0	2	0,200-0,249	90	16	HC RB	0,53	0,42	180	0,028

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, ЕР	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Угол, град	притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
ME1032046	Зеленый	0-0	3,5	0,350-0,399	90	30	HC RC	0,83	0,66	180	0,028
ME406683	Зеленый	4-0	1,5	0,150-0,199	90	19	CU RC	0,43	0,34	135	0,028
ME106680	Зеленый	0-0	3,5	0,350-0,399	90	30	CU RC	0,83	0,66	180	0,028
ME300636	Зеленый	3-0	2	0,200-0,249	90	17	HC TC	0,53	0,42	180	0,028
ME1032049	Зеленый	0-0	3,5	0,350-0,399	90	36	HC RC	0,83	0,66	180	0,028
ME206952	Зеленый	2-0	3	0,300-0,349	90	35	HC TC	0,73	0,58	180	0,028
ME206623	Зеленый	2-0	3	0,300-0,349	90	60	ST CT	0,73	0,58	0	0,028
ME643	Зеленый	2-0	3	0,300-0,349	100	45	HC TC	1,20	0,96	180	0,029
ME646	Зеленый	5-0	1	0,100-0,149	75	55	HC TC	0,82	0,66	180	0,028
ME617	Зеленый	2-0	3	0,300-0,349	90	17	HC TC DN C2	0,73	0,58	180	0,028
ME682	Зеленый	4-0	1,5	0,150-0,199	76	8	QC SM	0,43	0,34	90	0,028
ME683	Зеленый	5-0	1	0,100-0,149	45	8	QC SM	0,38	0,30	90	0,027

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, ЕР	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
MME6577	Белый	2-0	3	0,300-0,349	75	25	HC TC TP5	0,73	0,58	180	0,028
ME673W	Белый	2-0	3	0,300-0,349	76	17	HC TC	0,73	0,58	180	0,028
MME6555	Белый	2-0	3	0,300-0,349	75	17	HC TC TP5	0,73	0,58	180	0,028
ME687W	Белый	2-0	3	0,300-0,349	76	25	HC TC DN	0,73	0,58	180	0,028
PME617	Зеленый	2-0	3	0,300-0,349	90	17	HC TC DN TP	0,73	0,58	180	0,028
PME687	Зеленый	2-0	3	0,300-0,349	76	25	HC TC DN TP	0,73	0,58	180	0,028
PME687W	Белый	2-0	3	0,300-0,349	76	25	HC TC DN TP	0,73	0,58	180	0,028
ME4843	Зеленый	2-0	3	0,300-0,349	75	45	HC TC (4 in 1)	1,20	0,96	180	0,029

Код для заказа (артикул)	а нити	ый номер, USP	й размер, EP	р нити, мм	нити, см (± 2%)	иглы, мм (± 1%)	иглы	иглы, мм (± 1%)	в зоне крепления шовной нити, мм (± 1%)	б иглы , град	притуплен ия рабочей части иглы, не более мм (± 1%)
ME6552	Зелены й	3-0	2	0,200- 0,249	100	26	HC RB DN	0,53	0,42	180	0,028
ME6597	Зелены й	6-0	0,7	0,070- 0,099	75	11	CU RB DN	0,24	0,19	135	0,027
ME6937	Зелены й	2-0	3	0,300- 0,349	90	17	HC TC DN CI	0,73	0,58	180	0,028
ME6977	Зелены й	2-0	3	0,300- 0,349	90	26	HC TC DN	0,73	0,58	180	0,028
ME6978	Зелены й	0-0	3,5	0,350- 0,399	90	26	HC TC DN	0,83	0,66	180	0,028
ME6987	Белый	2-0	3	0,300- 0,349	90	26	HC TC DN	0,73	0,58	180	0,028
ME617W	Белый	2-0	3	0,300- 0,349	90	17	HC TC DN	0,73	0,58	180	0,028
ME517G	Зелены й	0-0	3,5	0,350- 0,399	75	22	HC RC	0,83	0,66	180	0,028
ME844G	Зелены й	0-0	3,5	0,350- 0,399	90	36	HC RB	0,83	0,66	180	0,028

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
ME655	Зеленый	3-0	2	0,200-0,249	100	25	HC RB	0,53	0,42	180	0,028
ME4846	Зеленый	5-0	1	0,100-0,149	75	55	HC TC (4 in 1)	0,82	0,66	180	0,028
ME301056	Белый	3-0	2	0,200-0,249	75	17	HC RB DN	0,53	0,42	180	0,028
ME201062	Зеленый	2-0	3	0,300-0,349	75	20	HC RB DN	0,73	0,58	180	0,028
ME201072	Белый	2-0	3	0,300-0,349	75	25	HC TC DN	0,73	0,58	180	0,028
ME506757	Зеленый	5-0	1	0,100-0,149	60	17	HC RB DN	0,38	0,30	180	0,027
ME206760	Зеленый	2-0	3	0,300-0,349	90	17	HC RB DN	0,73	0,58	180	0,028
ME206767	Зеленый	2-0	3	0,300-0,349	90	26	HC RB DN	0,73	0,58	180	0,028
ME406831	Зеленый	4-0	1,5	0,150-0,199	75	26	HC RB	0,43	0,34	180	0,028
ME306832	Зеленый	3-0	2	0,200-	75	26	HC	0,53	0,42	180	0,028

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, ЕР	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Биглы, град	притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
	й			0,249			RB DN				
ME406915	Белый	4-0	1,5	0,150- 0,199	90	17	HC TC DN	0,43	0,34	180	0,028
ME506934	Зеленый	5-0	1	0,100- 0,149	90	17	HC TC DN	0,38	0,30	180	0,027
ME306936	Зеленый	3-0	2	0,200- 0,249	90	17	HC TC DN	0,53	0,42	180	0,028
ME206953	Зеленый	2-0	3	0,300- 0,349	90	36	HC TC DN	0,73	0,58	180	0,028
ME306976	Зеленый	3-0	2	0,200- 0,249	90	26	HC TC	0,53	0,42	180	0,028
ME206997	Зеленый	2-0	3	0,300- 0,349	90	26	HC TC DN	0,73	0,58	135	0,028
ME200932	Зеленый	2-0	3	0,300- 0,349	75	31	HC RB	0,73	0,58	180	0,028
ME306522	Зеленый	3-0	2	0,200- 0,249	90	26	HC RB DN	0,53	0,42	180	0,028
ME206523	Зеленый	2-0	3	0,300- 0,349	90	22	HC RB	0,73	0,58	180	0,028

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, ЕР	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Изгиб иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
							DN				
ME206833	Зеленый	2-0	3	0,300-0,349	75	22	HC RB	0,73	0,58	180	0,028
ME200411	Зеленый	2-0	3	0,300-0,349	75	26	HC RB	0,73	0,58	180	0,028
ME010518	Зеленый	1-0	4	0,400-0,499	75	22	HC RC	0,98	0,78	180	0,028
ME200519	Зеленый	2-0	3	0,300-0,349	75	22	HC RC	0,73	0,58	180	0,028
ME202613	Зеленый	2-0	3	0,300-0,349	75	26	HC TC DN TP	0,73	0,58	180	0,028
ME200553	Зеленый	2-0	3	0,300-0,349	75	17	HC TC DN TP	0,73	0,58	180	0,028
ME200054	Зеленый	2-0	3	0,300-0,349	75	17	HC TC DN PG	0,73	0,58	180	0,028
ME200873	Зеленый	2-0	3	0,300-0,349	75	17	HC RB	0,73	0,58	180	0,028
ME2043122	Белый	2-0	3	0,300-0,349	75	17	HC RB	0,73	0,58	180	0,028
ME200412	Белый	2-0	3	0,300-	75	26	HC	0,73	0,58	180	0,028

Код для заказа (артикул)	Окраска нити	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Диаметр нити, мм	Длина нити, см ($\pm 2\%$)	Длина иглы, мм ($\pm 1\%$)	Тип иглы	Диаметр иглы, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити, мм ($\pm 1\%$)	Угол иглы, град	Радиус притупления рабочей части иглы, не более мм ($\pm 1\%$)
				0,349			RB				
ME500580	Зеленый	5-0	1	0,100-0,149	90	12	CU RC	0,38	0,30	135	0,027

Таблица 2.2 Технические характеристики

Код для заказа (артикул)	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Остаточная деформация иглы при приложении усилия 5Н, мм	Разрывная нагрузка в простом узле стерильных не рассасывающихся шовных материалов, Н, не менее	Усилие отрыва шовного материала от иглы, Н, не менее
<i>Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAMIDE с иглой</i>					
NYL1001756	10-0	0,2	0,27	0,20	0,14
NYL306631	3-0	2	1,13	9,0	6,8
NYL301627	3-0	2	1,58	9,0	6,8
NYL010738	1-0	4	2,25	27,0	18
NYL406621	4-0	1,5	0,90	5,0	4,5
NYL501854	5-0	1	0,72	3,0	2,3
NYL501502	5-0	1	0,68	3,0	2,3
NYL601600	6-0	0,7	0,41	1,5	1,7
NYL300079	3-0	2	3,60	9,0	6,8
NYL013348	1-0	4	2,25	27,0	18
NYL202422	2-0	3	1,71	15,0	11

Код для заказа (артикул)	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Остаточная деформация иглы при приложении усилия 5Н, мм	Разрывная нагрузка в простом узле стерильных не рассасывающихся шовных материалов, Н, не менее	Усилие отрыва шовного материала от иглы, Н, не менее
NYL206641	2-0	3	1,13	15,0	11
NYL010743	1-0	4	1,58	27,0	18
NYL901769	9-0	0,3	0,28	0,35	0,20
NYL303211	3-0	2	0,72	9,0	6,8
NYL100379	0-0	3,5	2,03	22,0	15
NYL012441	1-0	4	1,71	27,0	18
NYL1007000	10-0	0,2	0,24	0,10	0,14
NYL203256	2-0	3	1,62	15,0	11
NYL501858	5-0	1	1,13	3,0	2,3
NYL103227	0-0	3,5	1,35	22,0	15
NYL801765	8-0	0,4	0,36	0,6	0,50
NYL010757	1-0	4	2,03	27,0	18
NYL808170	8-0	0,4	0,41	0,6	0,50
NYL010729	1-0	4	2,25	27,0	18
NYL802812	8-0	0,4	0,22	0,6	0,50
NYL103250	0-0	3,5	1,62	22,0	15
NYL500661	5-0	1	0,90	3,0	2,3
NYL500532	5-0	1	1,13	3,0	2,3
NYL600507	6-0	0,7	0,68	1,5	1,7
NYL405503	4-0	1,5	1,13	5,0	4,5
NYL013257	1-0	4	1,62	27,0	18
NYL015415	1-0	4	1,80	27,0	18
NYL023259	2-0	3	2,16	15,0	11

Код для заказа (артикул)	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Остаточная деформация иглы при приложении усилия 5Н, мм	Разрывная нагрузка в простом узле стерильных не рассасывающихся шовных материалов, Н, не менее	Сила отрыва шовного материала от иглы, Н, не менее
NYL50 3316	5-0	1	0,59	3,0	2,3
NYL40 3319	4-0	1,5	0,72	5,0	4,5
NYL60 3320	6-0	0,7	0,45	1,5	1,7
NYL30 3328	3-0	2	1,17	9,0	6,8
NYL30 3328SL	3-0	2	1,17	9,0	6,8
NYL20 3336	2-0	3	2,03	15,0	11
NYL20 3336SL	2-0	3	2,03	15,0	11
NYL10 3337	0-0	3,5	2,03	22,0	15
NYL01 3338	1-0	4	2,03	27,0	18
NYL10 3346	0-0	3,5	1,80	22,0	15
NYL01 3348	1-0	4	2,16	27,0	18
NYL10 3389	0-0	3,5	0,027	22,0	15
NYL100 3718	10-0	0,2	0,27	0,10	0,14
NYL100 3719	10-0	0,2	0,27	0,10	0,14
NYL30 3321	3-0	2	0,72	9,0	6,8
NYL10 3340	0-0	3,5	1,80	22,0	15
NYL01 3347	1-0	4	1,80	27,0	18
NYL90 3709	9-0	0,3	0,27	0,35	0,20
NYL601601	6-0	0,7	0,45	1,5	1,7
NYL501601	5-0	1	0,45	3,0	2,3
NYL601610	6-0	0,7	0,50	1,5	1,7
NYL501611	5-0	1	0,50	3,0	2,3
NYL401612	4-0	1,5	0,50	5,0	4,5

Код для заказа (артикул)	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Остаточная деформация иглы при приложении усилия 5Н, мм	Разрывная нагрузка в простом узле стерильных не рассасывающихся шовных материалов, Н, не менее	Усилие отрыва шовного материала от иглы, Н, не менее
NYL601614	6-0	0,7	0,72	1,5	1,7
NYL501618	5-0	1	0,86	3,0	2,3
NYL401619	4-0	1,5	0,86	5,0	4,5
NYL401620	4-0	1,5	0,86	5,0	4,5
NYL301621	3-0	2	0,86	9,0	6,8
NYL601851	6-0	0,7	0,59	1,5	1,7
NYL501852	5-0	1	0,59	3,0	2,3
NYL401861	4-0	1,5	0,72	5,0	4,5
NYL200568	2-0	3	1,40	15,0	11
NYL100724	0-0	3,5	1,80	22,0	15
NYL100739	0-0	3,5	1,40	22,0	15
NYL100740	0-0	3,5	1,80	22,0	15
NYL100741	0-0	3,5	2,16	22,0	15
NYL010745	1-0	4	1,40	27,0	18
NYL300627	3-0	2	0,018	9,0	6,8
NYL1007770	10-0	0,2	0,27	0,10	0,14
NYL100737	0-0	3,5	1,80	22,0	15
NYL10103080	0-0	3,5	3,60	22,0	15
NYL10103090	0-0	3,5	4,05	22,0	15
NYL015955	1-0	4	1,80	27,0	18
NYL020798	2-0	3	4,05	15,0	11
NYL200664	2-0	3	1,17	15,0	11
	5-0	1	0,68	3,0	2,3

Код для заказа (артикул)	номер, USP	размер, EP	я деформация иглы при приложении усилия 5Н, мм	простом узле стерильных не рассасывающихся шовных материалов, Н, не менее	шовного материала от иглы, Н, не менее
NYL015956	1-0	4	1,80	27,0	18
NYL1009060	10-0	0,2	0,29	0,10	0,14
NYL501719	5-0	1	0,59	3,0	2,3
NYL301625	3-0	2	1,17	9,0	6,8
NYL010680	1-0	4	1,35	27,0	18
NYL301622	3-0	2	0,86	9,0	6,8
NYL201626	2-0	3	1,17	15,0	11
NYL012797	1-0	4	4,05	27,0	18
NYL203232	2-0	3	1,35	15,0	11
NYL601615	6-0	0,7	0,72	1,5	1,7
NYL200795	2-0	3	4,05	15,0	11
NYL200776	2-0	3	2,48	15,0	11
NYL401618	4-0	1,5	0,86	5,0	4,5
NYL022407	2-0	3	1,80	15,0	11
Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAMIDE без иглы					
NYS20 903	2-0	3	-	15,0	НП
NYS10 904	0-0	3,5	-	22,0	НП
NYS01 905	1-0	4	-	27,0	НП
NYS02 906	2-0	3	-	15,0	НП
Материал хирургический шовный не рассасывающийся с иглой FILAPROP					
PPL300621	3-0	2	2,70	9,0	6,8
PPL308849	3-0	2	1,35	9,0	6,8
PPL408015	4-0	1,5	0,86	5,0	4,5
PPL208850	2-0	3	1,35	15,0	11

Код для заказа (артикул)	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Остаточная деформация иглы при приложении усилия 5Н, мм	Разрывная нагрузка в простом узле стерильных не рассасывающихся шовных материалов, Н, не менее	Усилие отрыва шовного материала от иглы, Н, не менее
PPL708801	7-0	0,5	0,50	1,0	0,8
PPL508010	5-0	1	0,86	3,0	2,3
PPL208689	2-0	3	1,80	15,0	11
PPL408875	4-0	1,5	0,72	5,0	4,5
PPL600523	6-0	0,7	0,68	1,5	1,7
PPL208937	2-0	3	0,77	15,0	11
PPL400539	4-0	1,5	1,13	5,0	4,5
PPL300626	3-0	2	1,58	9,0	6,8
PPL1001713	10-0	0,2	0,72	0,10	0,14
PPL200987	2-0	3	4,05	15,0	11
PPL408665	4-0	1,5	0,59	5,0	4,5
PPL408879	4-0	1,5	1,13	5,0	4,5
PPL508662	5-0	1	0,36	3,0	2,3
PPL018450	1-0	4	2,03	27,0	18
PPL102815	0-0	3,5	1,35	22,0	15
PPL308392	3-0	2	0,90	9,0	6,8
PPL400835	4-0	1,5	0,77	5,0	4,5
PPL608873	6-0	0,7	0,72	1,5	1,7
PPL308731	3-0	2	0,99	9,0	6,8
PPL508881	5-0	1	1,13	3,0	2,3
PPL508882	5-0	1	0,72	3,0	2,3
PPL102820	0-0	3,5	1,17	22,0	15
PPL208852	2-0	3	1,80	15,0	11

Код для заказа (артикул)	номер, USP	размер, ЕР	я деформация иглы при приложении усилия 5Н, мм	простом узле стерильных не рассасывающихся шовных материалов, Н, не менее	шовного материала от иглы, Н, не менее
PPL500527	5-0	1	0,68	3,0	2,3
PPL108470	0-0	3,5	1,80	22,0	15
PPL018475	1-0	4	2,25	27,0	18
PPL400525	4-0	1,5	0,68	5,0	4,5
PPL1001777	10-0	0,2	0,28	0,10	0,14
PPL408391	4-0	1,5	0,90	5,0	4,5
PPL102825	0-0	3,5	1,62	22,0	15
PPL508014	5-0	1	0,86	3,0	2,3
PPL902780	8-0	0,4	0,22	0,6	0,50
PPL608000	6-0	0,7	0,41	1,5	1,7
PPL30 018	3-0	2	0,99	9,0	6,8
PPL30 800	3-0	2	1,13	9,0	6,8
PPL60 823	6-0	0,7	0,68	1,5	1,7
PPL30 825	3-0	2	1,13	9,0	6,8
PPL10 830	0-0	3,5	1,35	22,0	15
PPL01 834	1-0	4	2,16	27,0	18
PPL30 838	3-0	2	1,13	9,0	6,8
PPL01 840	1-0	4	1,35	27,0	18
PPL01 843	1-0	4	1,80	27,0	18
PPL20 844	2-0	3	1,35	15,0	11
PPL10 846	0-0	3,5	1,35	22,0	15
PPL40 849	4-0	1,5	0,72	5,0	4,5
PPL40 870	4-0	1,5	0,72	5,0	4,5

Код для заказа (артикул)	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Остаточная деформация иглы при приложении усилия 5Н, мм	Разрывная нагрузка в простом узле стерильных не рассасывающихся шовных материалов, Н, не менее	Усилие отрыва шовного материала от иглы, Н, не менее
PPL60 878	6-0	0,7	0,54	1,5	1,7
PPL50 881	5-0	1	0,72	3,0	2,3
PPL50 882DN	5-0	1	0,72	3,0	2,3
PPL01 883	1-0	4	2,03	27,0	18
PPL30 887	3-0	2	0,90	9,0	6,8
PPL30 888	3-0	2	2,70	9,0	6,8
PPL50 889	5-0	1	0,54	3,0	2,3
PPL10 894	0-0	3,5	1,35	22,0	15
PPL60 895DN	6-0	0,7	0,45	1,5	1,7
PPL70 8702	7-0	0,5	0,41	1,0	0,8
PPL70 8704	7-0	0,5	0,41	1,0	0,8
PPL70 866ML	2-0	3	0,36	15,0	11
PPL80 876ML	2-0	3	0,36	15,0	11
PPL70 804	7-0	0,5	0,36	1,0	0,8
PPL70 811	7-0	0,5	0,27	1,0	0,8
PPL80 812	8-0	0,4	0,27	0,6	0,50
PPL80 813	8-0	0,4	0,41	0,6	0,50
PPL60 818	6-0	0,7	0,59	1,5	1,7
PPL60 829	6-0	0,7	0,59	1,5	1,7
PPL50 856	5-0	1	0,72	3,0	2,3
PPL70 866	7-0	0,5	0,36	1,0	0,8
PPL40 867	4-0	1,5	1,13	5,0	4,5
PPL60 872	6-0	0,7	0,41	1,5	1,7

Код для заказа (артикул)	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Остаточная деформация иглы при приложении усилия 5Н, мм	Разрывная нагрузка в простом узле стерильных не рассасывающихся шовных материалов, Н, не менее	шовного материала от иглы, Н, не менее
PPL70 873	7-0	0,5	0,41	1,0	0,8
PPL80 876	8-0	0,4	0,36	0,6	0,50
PPL60 893	6-0	0,7	0,36	1,5	1,7
PPG50 810	5-0	1	0,59	3,0	2,3
PPG40 846	4-0	1,5	0,77	5,0	4,5
PPL70 8701	7-0	0,5	0,41	1,0	0,8
PPL60 8726	6-0	0,7	0,59	1,5	1,7
PPL80 8732	8-0	0,4	0,27	0,6	0,50
PPL70 8735	7-0	0,5	0,36	1,0	0,8
PPL80 8741	8-0	0,4	0,36	0,6	0,50
PPL60 8805	6-0	0,7	0,41	1,5	1,7
PPL40 8845	4-0	1,5	1,13	5,0	4,5
PPL40 8935	4-0	1,5	0,77	5,0	4,5
PPL60 8307BL	6-0	0,7	0,59	1,5	1,7
PPL60 8597	6-0	0,7	0,50	1,5	1,7
PPL80 8101BL	8-0	0,4	0,36	0,6	0,50
PPL60 8718	6-0	0,7	0,59	1,5	1,7
PPL50 8556	5-0	1	0,72	3,0	2,3
PPL60 8726BL	6-0	0,7	0,59	1,5	1,7
PPL60 8726BX	6-0	0,7	0,59	1,5	1,7
PPL20 8977	2-0	3	1,17	15,0	11
PPL20 8937	2-0	3	0,77	15,0	11
PPL30 8522	3-0	2	1,17	9,0	6,8

Код для заказа (артикул)	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Остаточная деформация иглы при приложении усилия 5Н, мм	Разрывная нагрузка в простом узле стерильных не рассасывающихся шовных материалов, Н, не менее	Усилие отрыва шовного материала от иглы, Н, не менее
PPL30 8936	3-0	2	0,77	9,0	6,8
PPL40 8521	4-0	1,5	1,17	5,0	4,5
PPL50 8721	5-0	1	0,59	3,0	2,3
PPL50 8803	5-0	1	0,45	3,0	2,3
PPL50 8205	5-0	1	0,59	3,0	2,3
PPL60 8726XL	6-0	0,7	0,59	1,5	1,7
PPL70 8078	7-0	0,5	0,36	1,0	0,8
PPL80 8088	8-0	0,4	0,36	0,6	0,50
PPL80 8086XF	8-0	0,4	0,27	0,6	0,50
PPL70 8070	7-0	0,5	0,45	1,0	0,8
PPL70 8078BL	7-0	0,5	0,36	1,0	0,8
PPL60 8804	6-0	0,7	0,45	1,5	1,7
PPL60 8804BX	6-0	0,7	0,45	1,5	1,7
PPL50 8710	5-0	1	0,59	3,0	2,3
PPL40 8557	4-0	1,5	0,72	5,0	4,5
PPL50 8802BX	5-0	1	0,50	3,0	2,3
PPL60 8802	6-0	0,7	0,50	1,5	1,7
PPL802775	8-0	0,4	0,27	0,6	0,50
PPL802777	8-0	0,4	0,27	0,6	0,50
PPL708304	7-0	0,5	0,41	1,0	0,8
PPL408355	4-0	1,5	1,17	5,0	4,5
PPL408557	4-0	1,5	0,77	5,0	4,5
PPL308558	3-0	2	0,77	9,0	6,8

Код для заказа (артикул)	номер, USP	размер, Ег	и деформация иглы при приложении усилия 5Н, мм	простом узле стерильных не рассасывающихся шовных материалов, Н, не менее	шовного материала от иглы, Н, не менее
PPL508663	5-0	1	0,41	3,0	2,3
PPL508664	5-0	1	0,59	3,0	2,3
PPL408666	4-0	1,5	0,59	5,0	4,5
PPL308667	3-0	2	0,72	9,0	6,8
PPL808703	8-0	0,4	0,41	0,6	0,50
PPL708704	7-0	0,5	0,41	1,0	0,8
PPL608706	6-0	0,7	0,59	1,5	1,7
PPL608707	6-0	0,7	0,59	1,5	1,7
PPL508710	5-0	1	0,59	3,0	2,3
PPL508721	5-0	1	0,59	3,0	2,3
PPL708725	7-0	0,5	0,59	1,0	0,8
PPL408761	4-0	1,5	0,90	5,0	4,5
PPL308770	3-0	2	0,99	9,0	6,8
PPL708802	7-0	0,5	0,50	1,0	0,8
PPL508804	5-0	1	0,50	3,0	2,3
PPL608807	6-0	0,7	0,41	1,5	1,7
PPL708813	7-0	0,5	0,59	1,0	0,8
PPL608814	6-0	0,7	0,59	1,5	1,7
PPL608815	6-0	0,7	0,59	1,5	1,7
PPL508816	5-0	1	0,59	3,0	2,3
PPL408840	4-0	1,5	0,90	5,0	4,5
PPL408845	4-0	1,5	1,17	5,0	4,5
PPL508890	5-0	1	0,59	3,0	2,3

Код для заказа (артикул)	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Остаточная деформация иглы при приложении усилия 5Н, мм	Разрывная нагрузка в простом узле стерильных не рассасывающихся шовных материалов, Н, не менее	Усилие отрыва шовного материала от иглы, Н, не менее
PPL308936	3-0	2	0,77	9,0	6,8
PPL308976	3-0	2	1,17	9,0	6,8
PPL108434	0-0	3,5	1,80	22,0	15
PPL208523	2-0	3	1,17	15,0	11
PPL508557	5-0	1	0,77	3,0	2,3
PPL608617	6-0	0,7	0,59	1,5	1,7
PPL408634	4-0	1,5	0,72	5,0	4,5
PPL308665	3-0	2	0,86	9,0	6,8
PPL308684	3-0	2	1,08	9,0	6,8
PPL608697	6-0	0,7	0,50	1,5	1,7
PPL508698	5-0	1	0,59	3,0	2,3
PPL308832	3-0	2	1,17	9,0	6,8
PPL208833	2-0	3	1,17	15,0	11
PPL018435	1-0	4	1,80	27,0	18
PPL108424	0-0	3,5	1,67	22,0	15
PPL308687	3-0	2	0,86	9,0	6,8
PPL208685	2-0	3	1,08	15,0	11
PPL208977	2-0	3	1,17	15,0	11
PPL100830	0-0	3,5	1,35	22,0	15
PPL408682	4-0	1,5	0,86	5,0	4,5
PPL508756	5-0	1	0,77	3,0	2,3
PPL408683	4-0	1,5	0,90	5,0	4,5
PPL309556	3-0	2	0,90	9,0	6,8

Код для заказа (артикул)	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Остаточная деформация иглы при приложении усилия 5Н, мм	Разрывная нагрузка в простом узле стерильных не рассасывающихся шовных материалов, Н, не менее	шовного материала от иглы, Н, не менее
PPL309557	3-0	2	0,90	9,0	6,8
PPL408204	4-0	1,5	0,59	5,0	4,5
PPL408861	4-0	1,5	0,81	5,0	4,5
PPL608776	6-0	0,7	0,54	1,5	1,7
PPL308833	3-0	2	1,17	9,0	6,8
PPL608714	6-0	0,7	0,59	1,5	1,7
PPL508757	5-0	1	0,72	3,0	2,3
PPL802774	8-0	0,4	0,27	0,6	0,50
PPL1002795	10-0	0,2	0,27	0,10	0,14
PPL20208276	2-0	3	3,38	15,0	11
PPL108454	0-0	3,5	2,16	22,0	15
PPL608708	6-0	0,7	0,59	1,5	1,7
PPL508722	5-0	1	0,59	3,0	2,3
PPL308559	3-0	2	0,72	9,0	6,8
PPL200752	2-0	3	3,38	15,0	11
PPL508006	5-0	1	0,72	3,0	2,3
PPL408841	4-0	1,5	0,90	5,0	4,5
PPL608806	6-0	0,7	0,41	1,5	1,7
PPL808704	8-0	0,4	0,40	0,6	0,50
PPL608802	6-0	0,7	0,50	1,5	1,7
PPL308977	3-0	2	1,13	9,0	6,8
PPL200623	2-0	3	2,70	15,0	11
PPL012989	1-0	4	4,05	27,0	18

Код для заказа (артикул)	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Остаточная деформация иглы при приложении усилия 5Н, мм	Разрывная нагрузка в простом узле стерильных не рассасывающихся шовных материалов, Н, не менее	Усилие отрыва шовного материала от иглы, Н, не менее
PPL308525	3-0	2	1,35	9,0	6,8
PPL408020	4-0	1,5	1,17	5,0	4,5
PPL308549	3-0	2	0,72	9,0	6,8
PPL308685	3-0	2	1,17	9,0	6,8
Материал хирургический шовный не рассасывающийся с иглой FILASILK					
SLK100792	0-0	3,5	4,05	22,0	15
SLK400536	4-0	1,5	1,13	5,0	4,5
SLK600529	6-0	0,7	0,68	1,5	1,7
SLK200367	2-0	3	0,90	15,0	11
SLK020794	2-0	3	4,05	15,0	11
SLK200790	2-0	3	2,70	15,0	11
SLK500581	5-0	1	0,72	3,0	2,3
SLK300672	3-0	2	0,90	9,0	6,8
SLK500528	5-0	1	0,68	3,0	2,3
SLK100789	0-0	3,5	2,70	22,0	15
SLK100552	0-0	3,5	2,25	22,0	15
SLK300622	3-0	2	2,70	9,0	6,8
SLK800818	8-0	0,4	0,36	0,6	0,50
SLK400606	4-0	1,5	0,68	5,0	4,5
SLK300765	3-0	2	3,38	9,0	6,8
SLK400524	4-0	1,5	0,68	5,0	4,5
SLK400671	4-0	1,5	0,90	5,0	4,5
SLK300379	3-0	2	1,13	9,0	6,8

Код для заказа (артикул)	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Остаточная деформация иглы при приложении усилия 5Н, мм	Разрывная нагрузка в простом узле стерильных не рассасывающихся шовных материалов, Н, не менее	Разрывная нагрузка в тканевом шовном материале от иглы, Н, не менее
SLK907059	9-0	0,3	0,27	0,35	0,20
SLK600593	6-0	0,7	0,41	1,5	1,7
SLK300576	3-0	2	1,13	9,0	6,8
SLK012233	1-0	4	1,17	27,0	18
SLK400377	4-0	1,5	0,90	5,0	4,5
SLK500595	5-0	1	0,45	3,0	2,3
SLK100371	0-0	3,5	1,58	22,0	15
SLK40 5000	4-0	1,5	0,72	5,0	4,5
SLK30 5003	3-0	2	0,72	9,0	6,8
SLK30 5028	3-0	2	1,17	9,0	6,8
SLK20 5036	2-0	3	2,03	15,0	11
SLK10 5037	0-0	3,5	2,03	22,0	15
SLK40 5050	4-0	1,5	0,72	5,0	4,5
SLK20 5052	2-0	3	2,25	15,0	11
SLK01 5062	1-0	4	2,70	27,0	18
SLK50 5079	5-0	1	0,54	3,0	2,3
SLK40 5082	4-0	1,5	0,72	5,0	4,5
SLK30 5085	3-0	2	1,13	9,0	6,8
SLK40 5086	4-0	1,5	0,90	5,0	4,5
SLK30 5087	3-0	2	0,90	9,0	6,8
SLK20 5331	2-0	3	1,35	15,0	11
SLK10 5332	0-0	3,5	1,35	22,0	15
SLK20 5670	2-0	3	1,13	15,0	11

Код для заказа (артикул)	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Остаточная деформация иглы при приложении усилия 5Н, мм	Разрывная нагрузка в простом узле стерильных не рассасывающихся шовных материалов, Н, не менее	Усилие отрыва шовного материала от иглы, Н, не менее
SLK012243	1-0	4	1,35	27,0	18
SLK020936	2-0	3	1,80	15,0	11
SLK102223	0-0	3,5	1,35	22,0	15
SLK100373	0-0	3,5	1,04	22,0	15
SLK10105039	0-0	3,5	1,76	22,0	15
SLK200333	2-0	3	1,35	15,0	11
SLK010723	1-0	4	1,35	27,0	18
SLK100334	0-0	3,5	1,35	22,0	15
SLK200737	2-0	3	1,04	15,0	11
SLK10105024	0-0	3,5	1,08	22,0	15
SLK010338	1-0	4	1,67	27,0	18
SLK100791	0-0	3,5	3,38	22,0	15
SLK100337	0-0	3,5	1,67	22,0	15
SLK20205222	2-0	3	0,99	15,0	11
SLK300684	3-0	2	1,08	9,0	6,8
SLK3054601	3-0	2	0,77	9,0	6,8
SLK010339	1-0	4	1,80	27,0	18
SLK200327	2-0	3	1,17	15,0	11
SLK205610	2-0	3	0,77	15,0	11
SLK20205225	2-0	3	1,13	15,0	11
SLK0115175	1-0	4	1,22	27,0	18
SLK100383	0-0	3,5	1,17	22,0	15
SLK300587	3-0	2	0,99	9,0	6,8

Код для заказа (артикул)	номер, USP	размер, EP	я деформация иглы при приложении усилия 5Н, мм	простом узле стерильных не рассасывающихся шовных материалов, Н, не менее	шовного материала от иглы, Н, не менее
SLK205208	2-0	3	2,30	15,0	11
SLK200766	2-0	3	3,38	15,0	11
SLK300675	3-0	2	1,35	9,0	6,8
SLK300832	3-0	2	1,17	9,0	6,8
SLK200503	2-0	3	0,68	15,0	11
SLK300571	3-0	2	1,35	9,0	6,8
SLK300632	3-0	2	0,95	9,0	6,8
SLK202052221	2-0	3	0,99	15,0	11
SLK300882	3-0	2	0,72	9,0	6,8
SLK30305345	3-0	2	0,68	9,0	6,8
SLK30305325	3-0	2	1,13	9,0	6,8
SLK302508	3-0	2	0,99	9,0	6,8
SLK20205290	2-0	3	0,90	15,0	11
SLK300577	3-0	2	1,13	9,0	6,8
SLK300883	3-0	2	0,72	9,0	6,8
SLK301684	3-0	2	1,08	9,0	6,8
SLK30305319	3-0	2	0,86	9,0	6,8
SLK801822	8-0	0,4	0,27	0,6	0,50
SLK20205210	2-0	3	0,45	15,0	11
SLK30305390	3-0	2	0,54	9,0	6,8
SLK400629	4-0	1,5	1,08	5,0	4,5
SLK30305315	3-0	2	0,68	9,0	6,8
SLK400537	4-0	1,5	1,08	5,0	4,5

Код для заказа (артикул)	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Остаточная деформация иглы при приложении усилия 5Н, мм	Разрывная нагрузка в простом узле стерильных не рассасывающихся шовных материалов, Н, не менее	Усилие отрыва шовного материала от иглы, Н, не менее
SLK202052151	2-0	3	0,68	15,0	11
SLK400683	4-0	1,5	0,86	5,0	4,5
SLK300588	3-0	2	0,90	9,0	6,8
SLK400736	4-0	1,5	0,54	5,0	4,5
SLK50505515	5-0	1	0,68	3,0	2,3
SLK80805830	8-0	0,4	0,27	0,6	0,50
SLK30305310	3-0	2	0,45	9,0	6,8
SLK400734	4-0	1,5	0,68	5,0	4,5
SLK40405410	4-0	1,5	0,45	5,0	4,5
SLK500545	5-0	1	0,77	3,0	2,3
SLK400586	4-0	1,5	0,95	5,0	4,5
SLK400684	4-0	1,5	0,86	5,0	4,5
SLK50505521	5-0	1	0,95	3,0	2,3
SLK601732	6-0	0,7	0,41	1,5	1,7
SLK601675	6-0	0,7	0,72	1,5	1,7
SLK500580	5-0	1	0,72	3,0	2,3
SLK500640	5-0	1	0,54	3,0	2,3
SLK500682	5-0	1	0,86	3,0	2,3
SLK402510	4-0	1,5	1,17	5,0	4,5
SLK107921	0-0	3,5	3,60	22,0	15
SLK012793	1-0	4	4,05	27,0	18
SLK200791	2-0	3	4,05	15,0	11
SLK200685	2-0	3	1,17	15,0	11

Код для заказа (артикул)	номер, USP	размер, ЕР	я деформа ция иглы при приложен ии усилия 5Н, мм	простом узле стерильных не рассасывающихся шовных материалов, Н, не менее	шовного материала от иглы, Н, не менее
SLK300537	3-0	2	1,13	9,0	6,8
SLK10105076	0-0	3,5	2,03	22,0	15
SLK200584	2-0	3	1,80	15,0	11
SLK20205231	2-0	3	1,35	15,0	11
SLK200667	2-0	3	1,58	15,0	11
SLK801819	8-0	0,4	0,29	0,6	0,50
SLK300666	3-0	2	1,58	9,0	6,8
SLK700817	7-0	0,5	0,36	1,0	0,8
SLK600815	6-0	0,7	0,50	1,5	1,7
SLK207911	2-0	3	3,60	15,0	11
SLK302231	3-0	2	0,86	9,0	6,8
SLK102508	0-0	3,5	1,35	22,0	15
Материал хирургический шовный не рассасывающийся MERICRON XL с иглой					
ME206664	2-0	3	1,17	15,0	11
ME406891	4-0	1,5	0,59	5,0	4,5
ME0132050	1-0	4	1,62	27,0	18
ME012991	1-0	4	4,05	27,0	18
ME200095	2-0	3	1,13	15,0	11
ME0132039	1-0	4	1,35	27,0	18
ME500883	5-0	1	0,36	3,0	2,3
ME0132047	1-0	4	1,35	27,0	18
ME306683	3-0	2	0,86	9,0	6,8
ME506890	5-0	1	0,59	3,0	2,3

Код для заказа (артикул)	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Остаточная деформация иглы при приложении усилия 5Н, мм	Разрывная нагрузка в простом узле стерильных не рассасывающихся шовных материалов, Н, не менее	Усилие отрыва шовного материала от иглы, Н, не менее
ME100979	0-0	3,5	2,25	22,0	15
ME306759	3-0	2	0,72	9,0	6,8
ME1032046	0-0	3,5	1,35	22,0	15
ME406683	4-0	1,5	0,86	5,0	4,5
ME106680	0-0	3,5	1,35	22,0	15
ME300636	3-0	2	0,77	9,0	6,8
ME1032049	0-0	3,5	1,62	22,0	15
ME206952	2-0	3	1,58	15,0	11
ME206623	2-0	3	2,70	15,0	11
ME643	2-0	3	2,03	15,0	11
ME646	5-0	1	2,48	3,0	2,3
ME617	2-0	3	0,77	15,0	11
ME682	4-0	1,5	0,36	5,0	4,5
ME683	5-0	1	0,36	3,0	2,3
MME6577	2-0	3	1,13	15,0	11
ME673W	2-0	3	0,77	15,0	11
MME6555	2-0	3	0,77	15,0	11
ME687W	2-0	3	1,13	15,0	11
PME617	2-0	3	0,77	15,0	11
PME687	2-0	3	1,13	15,0	11
PME687W	2-0	3	1,13	15,0	11
ME4843	2-0	3	2,03	15,0	11
ME6552	3-0	2	1,17	9,0	6,8

Код для заказа (артикул)	номер, USP	размер, EP	я деформация иглы при приложении усилия 5Н, мм	простом узле стерильных не рассасывающихся шовных материалов, Н, не менее	шовного материала от иглы, Н, не менее
ME6597	6-0	0,7	0,50	1,5	1,7
ME6937	2-0	3	0,77	15,0	11
ME6977	2-0	3	1,17	15,0	11
ME6978	0-0	3,5	1,17	22,0	15
ME6987	2-0	3	1,17	15,0	11
ME617W	2-0	3	0,77	15,0	11
ME517G	0-0	3,5	0,99	22,0	15
ME844G	0-0	3,5	1,62	22,0	15
ME655	3-0	2	1,13	9,0	6,8
ME4846	5-0	1	2,48	3,0	2,3
ME301056	3-0	2	0,77	9,0	6,8
ME201062	2-0	3	0,90	15,0	11
ME201072	2-0	3	1,13	15,0	11
ME506757	5-0	1	0,77	3,0	2,3
ME206760	2-0	3	0,77	15,0	11
ME206767	2-0	3	1,17	15,0	11
ME406831	4-0	1,5	1,17	5,0	4,5
ME306832	3-0	2	1,17	9,0	6,8
ME406915	4-0	1,5	0,77	5,0	4,5
ME506934	5-0	1	0,77	3,0	2,3
ME306936	3-0	2	0,77	9,0	6,8
ME206953	2-0	3	1,62	15,0	11
ME306976	3-0	2	1,17	9,0	6,8

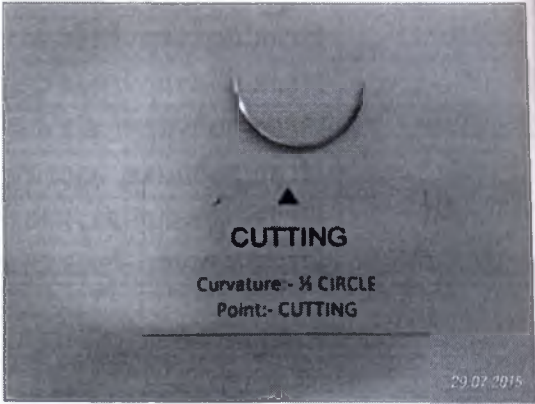
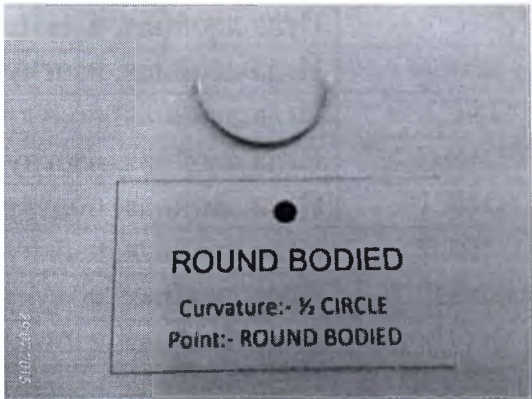
Код для заказа (артикул)	Условный номер, USP	Метрический размер, EP	Остаточная деформация иглы при приложении усилия 5Н, мм	Разрывная нагрузка в простом узле стерильных не рассасывающихся шовных материалов, Н, не менее	Усилие отрыва шовного материала от иглы, Н, не менее
ME206997	2-0	3	1,17	15,0	11
ME200932	2-0	3	1,40	15,0	11
ME306522	3-0	2	1,17	9,0	6,8
ME206523	2-0	3	0,99	15,0	11
ME206833	2-0	3	0,99	15,0	11
ME200411	2-0	3	1,17	15,0	11
ME010518	1-0	4	0,99	27,0	18
ME200519	2-0	3	0,99	15,0	11
ME202613	2-0	3	1,17	15,0	11
ME200553	2-0	3	0,77	15,0	11
ME200054	2-0	3	0,77	15,0	11
ME200873	2-0	3	0,77	15,0	11
ME2043122	2-0	3	0,77	15,0	11
ME200412	2-0	3	1,17	15,0	11
ME500580	5-0	1	0,54	3,0	2,3





Таблица 2.3 Технические характеристики (Описание видов игл)

Иглы	Описание
SM	Игла полукруглая с острием в виде лопатки
RB	Игла, изогнутая на 3/8 по окружности, с круглым телом
RC	Игла полукруглая, обратно-режущая
SM	Игла, 3321гнутая на 3/8 по окружности, с острием в виде лопатки
CT	Игла, изогнутая на 3/8 по окружности, режущая
RB	Игла полукруглая с круглым телом
TC	Игла полукруглая, конической формы, режущая
RB BP	Игла полукруглая с круглым телом и тупым острием
RB LOOP	Игла полукруглая с круглым телом, в виде петли
SM DN	Игла двойная, изогнутая на 3/8 по окружности, с острием в виде
RB SN	Игла одинарная, изогнутая на 3/8 по окружности с круглым телом
RB BL LOOP	Игла полукруглая с круглым телом, в виде черной петли
RB LOOP H	Игла полукруглая с круглым телом, в виде петли, тяжелая
TC	Игла, изогнутая на 3/8 по окружности, конической формы, режущая
RB DN	Игла двойная, изогнутая на 3/8 по окружности, с круглым телом
RB DNC1	Игла двойная, изогнутая на 3/8 по окружности, с круглым телом, Comp-
CT DN	Игла двойная, изогнутая на 3/8 по окружности, режущая
RB DNTN	Игла двойная, изогнутая на 3/8 по окружности, с круглым телом,
RB DNC2	Игла двойная, полукруглая, изогнутая на 3/8 по окружности, с круглым
RB DNN1	Игла двойная, изогнутая на 3/8 по окружности, с круглым телом,
TC DNC1	Игла двойная, полукруглая, Comp-1
RB DNC2	Игла двойная, изогнутая на 3/8 по окружности, с круглым телом, Comp-
RB DNTN	Игла двойная, полукруглая, с круглым телом, со жгутом из тефлона
RB DNTN	Игла двойная, изогнутая на 3/8 по окружности, с круглым телом,
RB DNTN	Игла двойная, изогнутая на 3/8 по окружности, с круглым телом,
TC DNC2	Игла полукруглая, конической формы, режущая, Comp-2
TC DN	Игла двойная, полукруглая, конической формы, режущая
RB DNVB	Игла двойная, изогнутая на 3/8 по окружности, с круглым телом, V-
CT VB D	Игла двойная, изогнутая на 3/8 по окружности, режущая, V-Black
RB DNTN	Игла двойная, изогнутая на 3/8 по окружности, с круглым телом,
RB DNC1	Игла двойная, полукруглая, Comp-1
RB DVB	Игла двойная, изогнутая на 3/8 по окружности, с круглым телом, V-
RB DN	Игла двойная, полукруглая, с круглым телом
RB DNN2	Игла двойная, изогнутая на 3/8 по окружности, с круглым телом,
RB DNVB	Игла двойная, изогнутая на 3/8 по окружности, с круглым телом, V-
RB	Игла полукруглая, с круглым телом
CT DN	Игла двойная, полукруглая, режущая
CT DNV	Игла двойная, изогнутая на 3/8 по окружности, режущая, фиолетовая
CT	Игла полукруглая, режущая
RC	Игла, изогнутая на 3/8 по окружности, обратно-режущая
RB TRON DN	Игла двойная, полукруглая, с круглым телом и острием «Трокар»

HC RB TC DN	Игла двойная, полукруглая, с круглым телом, заостренным острием
CU RB DN	Игла двойная, изогнутая на 3/8 по окружности, с круглым телом
FE RB	Игла, изогнутая на 5/8 по окружности, с круглым телом
QC SM	Игла с сечением в виде четверти круга и острием в виде лопатки
HC TC TP5	Игла полукруглая, конической формы, со жгутом из тефлона, Ts 5

Таблица 2.3.1 Технические характеристики (Описание видов)

Тип иглы:	Описание
HC – ½ круга (полукруглая)	
RB – круглая	
QC- ¼ круга	
CU- 3/8 круга	

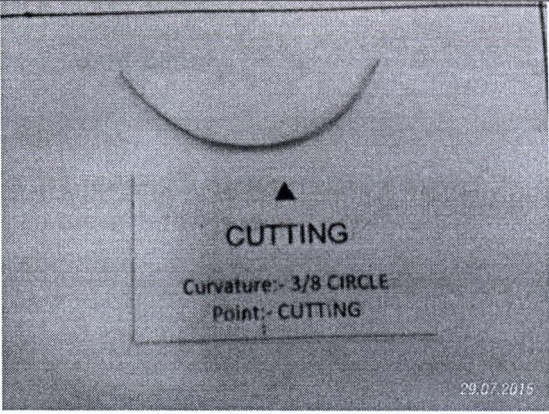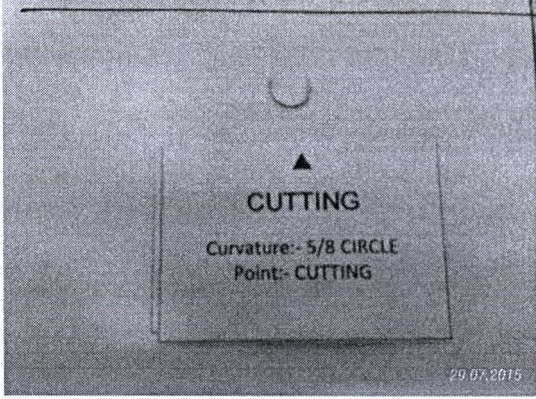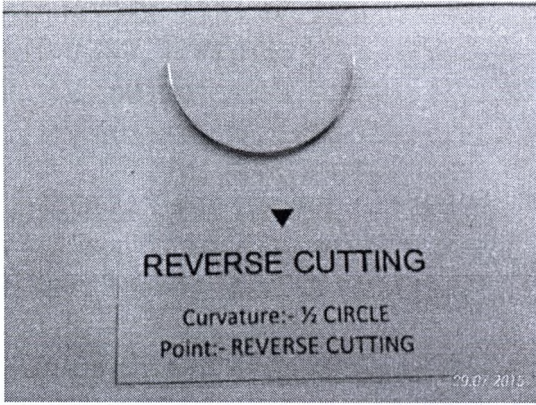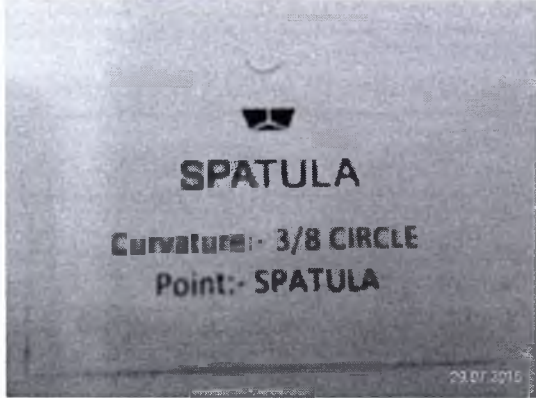ИГЛЫ:	Описание
	
E – 5/8 круга	
RC – обратно-режущая	
SM- игла лопаточкой	
TC – колюще-режущая	

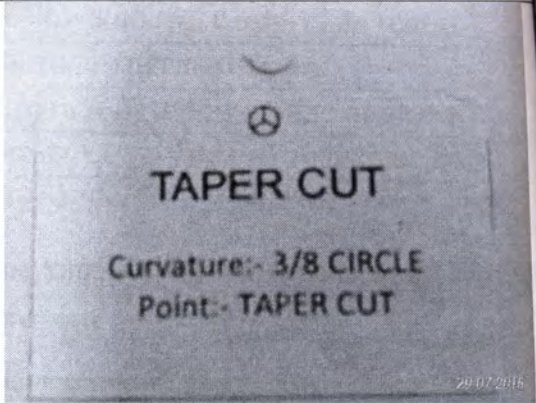
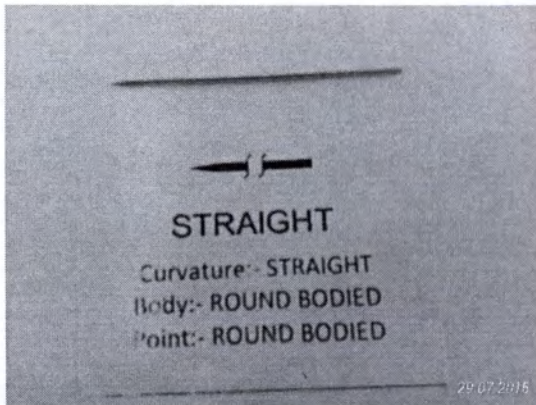
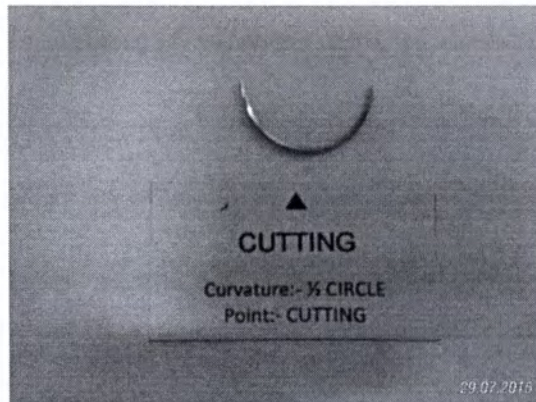
Тип иглы:	Описание
	
СТ- прямая	
СТ- режущая	

Таблица 2.4 Технические характеристики

Твердость игл:	HV 4900-6475 Н\мм ² ,
Упругость игл	упругие
Коррозионностойкость	Иглы коррозионностойкие
Внешний вид игл	Блестящие. Без трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев. В месте крепления шовной нити отсутствуют следы от применяемого технологического процесса инструмента
Острота колющей части иглы	Не более 0,025 мм без заусенцев и деформаций

ширина режущих ребер игл с свободным и шпательным острием	на длине от 2 до 5 диаметров хвостовика не превышает 0,025 мм.
отклонение от прямолинейности острием игл	Не более 2% от длины иглы
параметры шероховатости поверхности игл, не более:	- на стержне и острие – Ra 0.32 мкм, - в зоне крепления шовной иглы – Rz 20мкм.
полный средний ресурс иглы	Не менее 50 проколов
полный установленный ресурс	Не менее 25 проколов
показатели удлинения при разрыве шовного материала в простом узле	Не более 40%.
допустимая фактическая длина шовного материала	Допустимая фактическая длина шовного материала должны быть не менее 98% от номинальной длины.
требования, предъявляемые к упаковке для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации	Упаковка изделия подлежащих финишной стерилизации (газовый метод стерилизации (этилен оксидная стерилизация) и радиационная) должна соответствовать ISO 11607.

Ассортимент изделия:

Материал хирургический шовный не рассасывающийся, в следующих исполнениях:

Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAMIDE с иглой, в следующих исполнениях:

NYL1001756, NYL306631, NYL301627, NYL010738, NYL406621, NYL501854, NYL501502, NYL601600, NYL300079, NYL013348, NYL202422, NYL206641, NYL010743, NYL901769, NYL303211, NYL100379, NYL012441, NYL1007000, NYL203256, NYL501858, NYL103227, NYL801765, NYL010757, NYL808170, NYL010729, NYL802812, NYL103250, NYL500661, NYL500532, NYL600507, NYL405503, NYL013257, NYL015415, NYL023259, NYL50 3316, NYL40 3319, NYL60 3320, NYL30 3328, NYL30 3328SL, NYL20 3336, NYL20 3336SL, NYL10 3337, NYL01 3338, NYL10 3346, NYL01 3348, NYL10 3389, NYL100 3718, NYL100 3719, NYL30 3321, NYL10 3340, NYL01 3347, NYL90 3709, NYL601601, NYL501601, NYL601610, NYL501611, NYL401612, NYL601614, NYL501618, NYL401619, NYL401620, NYL301621, NYL601851, NYL501852, NYL401861, NYL200568, NYL100724, NYL100739, NYL100740, NYL100741, NYL010745, NYL300627, NYL1007770, NYL100737, NYL10103080, NYL10103090, NYL015955, NYL020798, NYL200664, NYL5018951, NYL015956, NYL1009060, NYL501719, NYL301625, NYL010680, NYL301622, NYL201626, NYL012797, NYL203232, NYL601615, NYL200795, NYL200776, NYL401618, NYL022407.

Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAMIDE без иглы, в следующих исполнениях:

YS20 903, NYS10 904, NYS01 905, SLS30 212, SLS20 213, SLS10 214, SLS01 215, SLS02 216, SLS03 217, SLS30 222, NYS02 906

Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAPROP с иглой, в следующих исполнениях:

PPL300621, PPL308849, PPL408015, PPL208850, PPL708801, PPL508010, PPL208689, PPL408875, PPL600523, PPL208937, PPL400539, PPL300626, PPL1001713, PPL200987, PPL408665, PPL408879, PPL508662, PPL018450, PPL102815, PPL308392, PPL400835, PPL608873, PPL308731, PPL508881, PPL508882, PPL102820, PPL208852, PPL500527, PPL108470, PPL018475, PPL400525, PPL1001777, PPL408391, PPL102825, PPL508014, PPL902780, PPL608000, PPL30 018, PPL30 800, PPL60 823, PPL30 825, PPL10 830, PPL01 834, PPL30 838, PPL01 840, PPL01 843, PPL20 844, PPL10 846, PPL40 849, PPL40 870, PPL60 878, PPL50 881, PPL50 882DN, PPL01 883, PPL30 887, PPL30 888, PPL50 889, PPL10 894, PPL60 95DN, PPL70 8702, PPL70 8704, PPL70 866ML, PPL80 876ML, PPL70 804, PPL70 811, PPL80 812, PPL80 813, PPL60 818, PPL60 829, PPL50 856, PPL70 866, PPL40 867, PPL60 872,

PPL70 873, PPL80 876, PPL60 893, PPG50 810, PPG40 846, PPL70 8701, PPL60 8726, PPL70 8732, PPL70 8735, PPL80 8741, PPL60 8805, PPL40 8845, PPL40 8935, PPL60 8307BL, PPL80 8597, PPL80 8101BL, PPL60 8718, PPL50 8556, PPL60 8726BL, PPL60 8726BX, PPL20 8937, PPL30 8522, PPL30 8936, PPL40 8521, PPL50 8721, PPL50 8803, PPL50 8726XL, PPL70 8078, PPL80 8088, PPL80 8086XF, PPL70 8070, PPL70 8078BL, PPL60 8804, PPL60 8804BX, PPL50 8710, PPL40 8557, PPL50 8802BX, PPL60 8802, PPL802777, PPL708304, PPL408355, PPL408557, PPL308558, PPL508663, PPL408666, PPL308667, PPL808703, PPL708704, PPL608706, PPL608707, PPL508721, PPL708725, PPL408761, PPL308770, PPL708802, PPL508803, PPL708813, PPL608814, PPL608815, PPL508816, PPL408840, PPL408845, PPL308936, PPL308976, PPL108434, PPL208523, PPL508556, PPL608617, PPL308665, PPL308684, PPL608697, PPL508698, PPL308832, PPL208833, PPL108424, PPL308687, PPL208685, PPL208977, PPL100830, PPL408682, PPL408683, PPL309556, PPL309557, PPL408204, PPL408861, PPL608776, PPL60871, PPL508757, PPL802774, PPL1002795, PPL20208276, PPL108454, PPL508722, PPL308559, PPL200752, PPL508006, PPL408841, PPL608806, PPL608802, PPL308977, PPL200623, PPL012989, PPL308525, PPL408020, PPL308685.

4. Материал хирургический шовный не рассасывающийся MERICRON XL с иглой, в следующих исполнениях:

ME206664, ME406891, ME0132050, ME012991, ME200095, ME0132039, ME500883, ME0132047, ME306683, ME506890, ME100979, ME306759, ME1032046, ME406683, ME106680, ME300636, ME1032049, ME206952, ME206623, ME643, ME646, ME617, ME682, ME683, MME6577, ME673W, MME6555, ME687W, PME617, PME687, PME687W, ME4843, ME6552, ME6597, ME6937, ME6977, ME6978, ME6987, ME617W, ME517G, ME844G, ME655, ME4846, ME301056, ME201062, ME201072, ME506757, ME206760, ME206767, ME406831, ME306832, ME406915, ME506934, ME306936, ME206953, ME306976, ME206997, ME200932, ME306522, ME206523, ME206833, ME200411, ME010518, ME200519, ME202613, ME200553, ME200054, ME200873, ME2043122, ME200412, ME500580.

5. Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILASILK с иглой, в следующих исполнениях:

SLK100792, SLK400536, SLK600529, SLK200367, SLK020794, SLK200790, SLK500581, SLK300672, SLK500528, SLK100789, SLK100552, SLK300622, SLK800818, SLK400606, SLK300765, SLK400524, SLK400671, SLK300379, SLK907059, SLK600593, SLK300576, SLK012233, SLK400377, SLK500595, SLK100371, SLK40 5000, SLK30 5003, SLK30 5028, SLK20 5036, SLK10 5037, SLK40 5050, SLK20 5052, SLK01 5062, SLK50 5079, SLK40 5082, SLK30 5085, SLK40 5086, SLK30 5087, SLK20 5331, SLK10 5332, SLK20 5670, SLK012243, SLK020936, SLK102223, SLK100373, SLK10105039, SLK200333, SLK010723, SLK100334, SLK200737, SLK10105024, SLK010338, SLK100791, SLK100337, SLK20205222, SLK300684, SLK3054601, SLK010339, SLK200327, SLK205610, SLK20205225, SLK0115175, SLK100383, SLK300587, SLK205208, SLK200766, SLK300675, SLK300832, SLK200503, SLK300571, SLK300632, SLK202052221, SLK300882, SLK30305345, SLK30305325, SLK302508, SLK20205290, SLK300577, SLK300883, SLK301684, SLK30305319, SLK801822, SLK20205210, SLK30305390, SLK400629, SLK30305315, SLK400537, SLK202052151, SLK400683, SLK300588, SLK400736, SLK50505515, SLK80805830, SLK30305310, SLK400734, SLK40405410, SLK500545, SLK400586, SLK400684, SLK50505521, SLK601732, SLK601675, SLK500580, SLK500640, SLK500682, SLK402510, SLK107921, SLK012793, SLK200791, SLK200685, SLK300537, SLK10105076, SLK200584, SLK20205231, SLK200667, SLK801819, SLK300666, SLK700817, SLK600815, SLK207911, SLK302231, SLK102508.

PL80 комплект поставки:

PL60 материал хирургический шовный не рассасывающийся – 1 уп.

8977, инструкция по применению – 1 шт.

8205,

PL60 сведения о маркировке и упаковке:

775, материал размещен в индивидуальном бумажном держателе и помещен в индивидуальную
664, метичную упаковку из фольги.

710, изделия поставляются стерильными и остаются стерильными, при условии, что упаковка не
807, была открыта, повреждена и срок ее годности не истек.

390,

34,

35,

56,



33,

08,

04,

9,

В

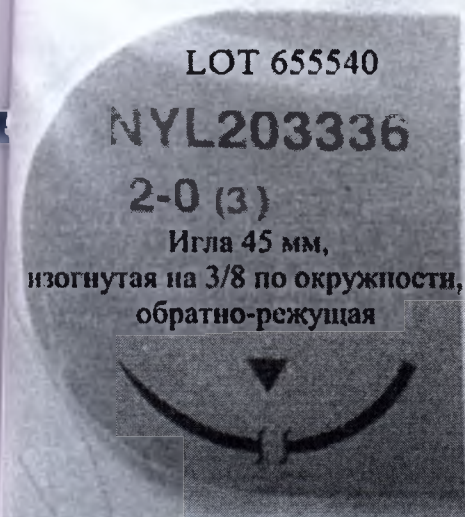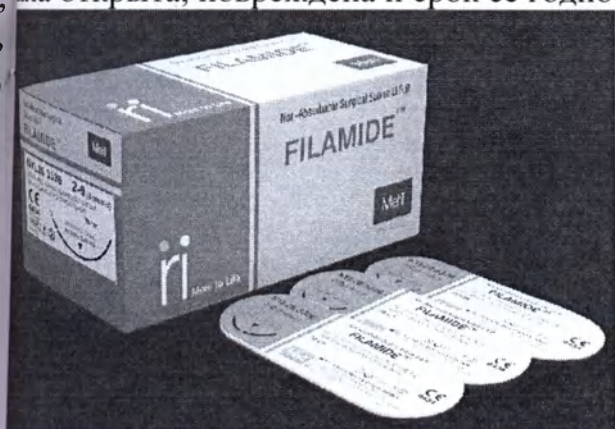


Материал хирургический шовный не рассасывающийся

FILAMIDE™

(Моноволокнистый полиамид, черный)

70cm

CE
0434

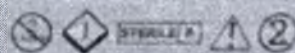



Meril

Meril Endo Surgery Private Limited


Third Floor, E1-E3, Meril Park, Survey No. 135/2 B &
174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi 396191, Gujarat, India
Mfg. Lic. No. G/26/1451 Rev 00

Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAMIDE с иглой


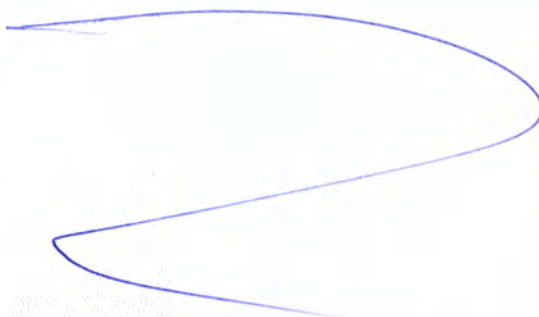


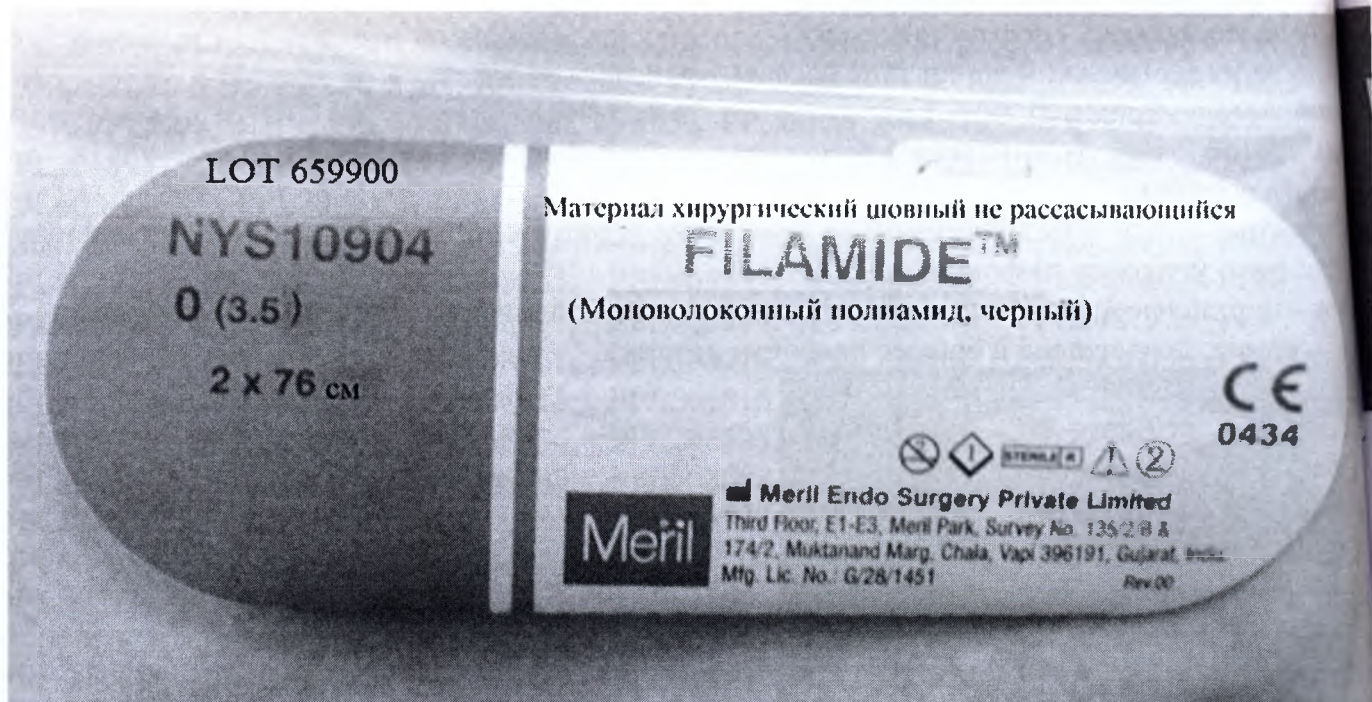

Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAMIDE без иглы

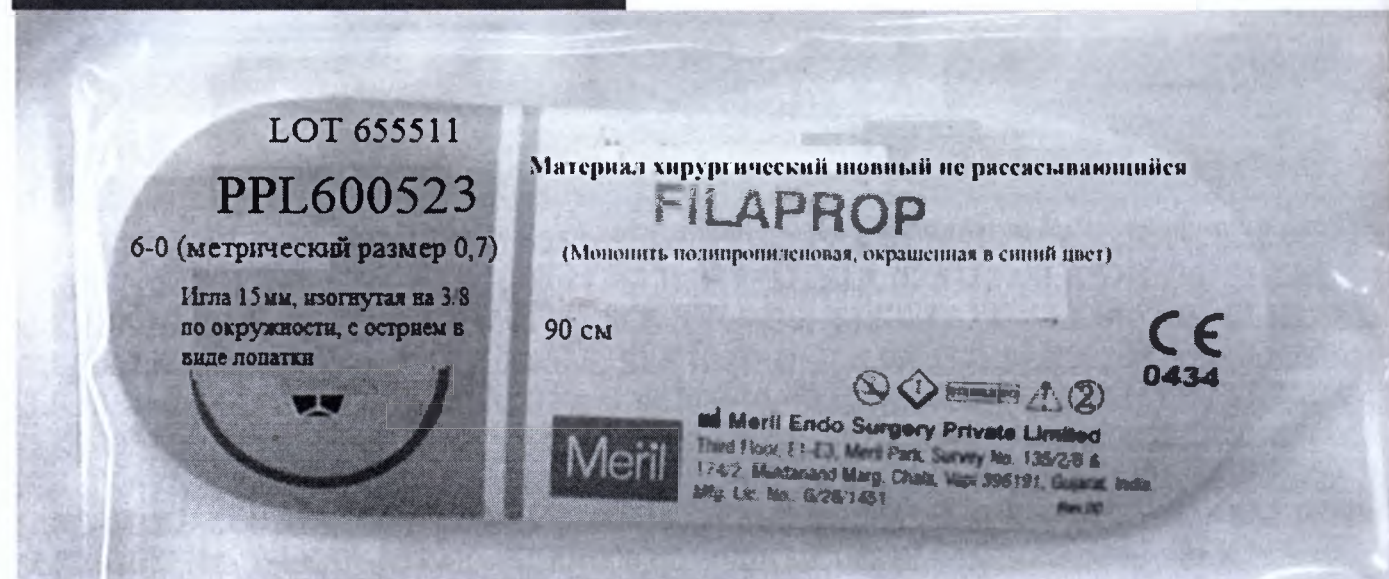

Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAPROP с иглой

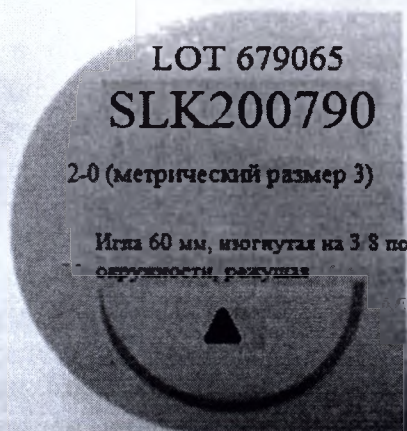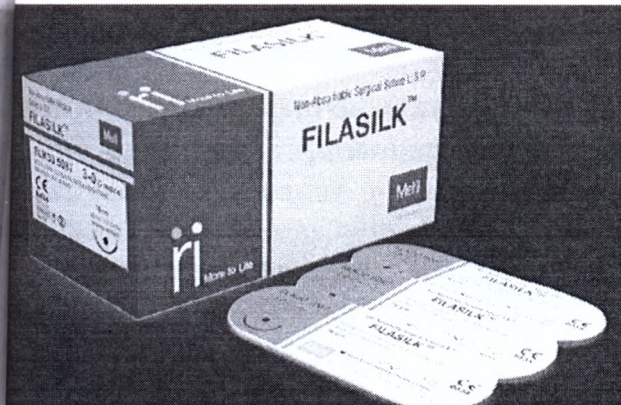

LOT 679065
SLK200790

2-0 (метрический размер 3)

Игла 60 мм, изогнутая из 3/8 по
окружности, рожковая

Материал хирургический шовный не рассасывающийся

FILASILK



(Плетеный шелковый материал, окрашенный в черный цвет)

90 CM

CE
0434

Meril Endo Surgery Private Limited
Third Floor, E1-E3, Meril Park, Survey No. 135/2/B &
174/2, Mutanand Marg, Chola, Vapi 396191, Gujarat, India
Mfg. Lic. No.: G/28/1451

Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILASILK с иглой

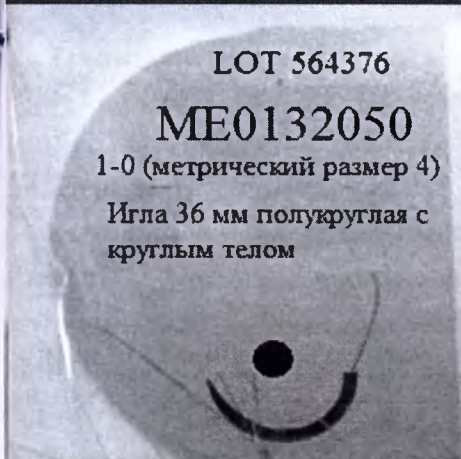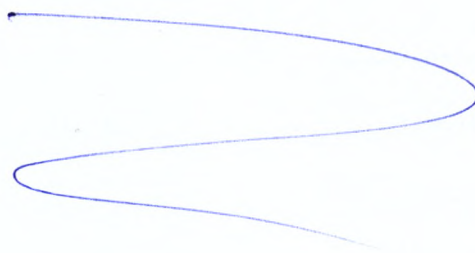

LOT 564376

ME0132050

1-0 (метрический размер 4)

Игла 36 мм полукруглая с
круглым телом

Материал хирургический шовный не рассасывающийся

MERICRON XL

(Полиэстер (полиэфир) плетеный с покрытием, окрашенный в зеленый цвет)

90 CM

CE
0434

Meril Endo Surgery Private Limited
Third Floor, E1-E3, Meril Park, Survey No. 135/2/B &
174/2, Mutanand Marg, Chola, Vapi 396191, Gujarat, India
Mfg. Lic. No.: G/28/1451

Материал хирургический шовный не рассасывающийся MERICRON XL с иглой

Маркировка индивидуальной упаковки изделия содержит следующую информацию:

- Торговый знак CE и регистрационный номер уполномоченного органа,
- Символ «Избегать контакта с влагой»,
- Символ «Не использовать, если упаковка повреждена!»,
- Символ «Не подвергать повторной стерилизации»,
- Номер производственной серии,
- Информация о производителе (наименование и адрес),
- Уполномоченный представитель в ЕС,
- Символ «Внимательно ознакомиться с инструкцией по использованию!»,
- Срок годности,
- Дата выпуска,
- Символ «Следуйте инструкциям по использованию»,
- Информация о методе стерилизации,
- Информация о параметрах иглы (форма, длина) – если игла входит в комплект поставки,
- Информация о параметрах нити (длина, условный номер).

Санитарная обработка

Изделия поставляются стерильными в упаковке завода-изготовителя. Метод стерилизации – газовый, стерилизующий агент – окись этилена (для *FILAPROP*) и радиационный стерилизующий агент – гамма-излучение (для *MERICRON XL*, *FILAMIDE*, *FILASILK*). Повторная стерилизация изделия строго запрещена. Изделие предназначено только для однократного применения.

Условия хранения и транспортировки

Условия хранения: температура воздуха от 0°C до +25°C при относительной влажности от 35% до 65% (неконденсирующаяся) и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа.

Хранить изделие в упаковке предприятия-изготовителя в сухом, чистом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, при контролируемой температуре. Срок хранения указан на этикетке каждого изделия.

Условия транспонирования: Изделие следует транспортировать при температуре воздуха от 0°C до +25°C при относительной влажности от 35% до 65% (неконденсирующаяся) и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа.

Рекомендации врачу-специалисту

Показания:

Изделие применяется в хирургии в качестве шовного не рассасывающегося материала.

Противопоказания:

1) В результате постепенной потери прочности на растяжение, которая может произойти при длительном нахождении шовного материала в организме, не рекомендуется использование шовного материала там, где необходимо постоянное сохранение прочности на растяжение.

Аллергические реакции.

Потенциальные осложнения:

Побочные реакции, связанные с использованием шовного материала, включают в себя аллергические реакции у отдельных пациентов, преходящие признаки локального раздражения и преходящую воспалительную реакцию в области раны. Как и любое другое инородное тело, шовный материал может вызывать обострение уже существующей инфекции.

Меры предосторожности

До начала использования шовного материала с целью закрытия раны пользователи должны ознакомиться с хирургическими процедурами и методами работы с не рассасывающимися шовными материалами, так как риск расхождения краев раны может варьировать в зависимости от места применения и используемого шовного материала.

Как и в случае с любыми другими инородными телами, длительный контакт шовного материала с соевым раствором (например, в мочевыводящих или желчевыводящих путях) может привести к образованию конкрементов. В случае инфицирования раны ее ведение осуществляется по общепринятой схеме лечения инфицированных и загрязненных ран.

При использовании следует избегать повреждений поверхности материала хирургическими инструментами, так как это может привести к разрыву используемого материала. При обращении с данным шовным материалом следует избегать нанесения повреждений материалу. Осторожно применяйте хирургические инструменты, такие, как зажимы и иглодержатели, которыми можно раздавить или смять шовный материал.

Чтобы избежать повреждения иглы, следует фиксировать ее в иглодержателе в точке, расположенной на расстоянии от 1/3 до 1/2 от конца иглы. Если вы держите иглу близко к острию, то это затруднит прокол и может вызвать поломку иглы. Если вы держите иглу близко к заднему концу или месту насадки, это может привести к ее изгибу или поломке. Восстановление формы иглы может привести к потере прочности и снижению устойчивости к изгибу или поломке.

При обращении с хирургическими иглами пользователи должны соблюдать принципы надлежащей хирургической практики во избежание случайных ранений. Использованные иглы должны собираться в контейнерах с маркировкой «Острые предметы».

Материалы (Информация о применении для медицинского работника)

Изделие и упаковка изделия не содержит латекса и поливинилхлорида (ПВХ). Ограничений по совместимости материалов нет.

Указания по применению:

При выборе шовного материала необходимо учитывать следующие факторы: состояние пациента, хирургический опыт, технику хирургического вмешательства, размер раны.

Действие:

Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAMIDE:

Шовный материал вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях с последующей инкапсуляцией фиброзной соединительной тканью. Несмотря на то, что полиамид не является рассасывающимся материалом, нарастающий гидролиз полиамида в организме может привести к постепенному снижению прочности.

Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAPROP с иглой:

Шовный материал вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях с последующей инкапсуляцией фиброзной соединительной тканью. Шовный материал не рассасывается и не подвергается деградации или ослаблению под действием ферментов в тканях. Ввиду относительной биологической инертности данного материала он рекомендуется к использованию в тканях, где желательна минимально возможная реакция в тканях. В качестве моноволоконного материала FILAPROP успешно применяется в хирургических ранах, где имеется риск последующего инфицирования или загрязнения, так как его использование позволяет свести к минимуму риск образования лигатурного свища или отторжения шовного материала. Поскольку шовный материал не срастается с окружающими тканями, он легко снимается простым вытягиванием шовного материала.

Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILASILK с иглой:

Шовный материал вызывает острую воспалительную реакцию в тканях с последующей инкапсуляцией фиброзной соединительной тканью. Несмотря на то, что шелковый шовный материал не рассасывается, прогрессирующая деградация белоксодержащих шелковых волокон in vivo может постепенно привести к полной потере прочности шовного материала с течением времени.

Материал хирургический шовный не рассасывающийся MERICRON XL с иглой:

Шовный материал вызывает минимальную первичную воспалительную реакцию в тканях с последующей инкапсуляцией фиброзной соединительной тканью. Эксперименты на подкожной имплантации у крыс показали, что значительных изменений первоначально прочности на растяжение не наблюдается в течение всего 180-дневного оценочного периода.

Технический ремонт и обслуживание

Техническому ремонту и обслуживанию не подлежит. Повторное применение и повторная стерилизация строго запрещена.

Сведения об утилизации

Утилизацию изделия проводить в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса (эпидемиологически опасные отходы). После аппаратных способов обеззараживания применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключая возможность их повторного применения, отходы классов Б могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО). Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б должна иметь маркировку свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

Гарантии

Срок хранения – 5 лет.

Адрес для приема рекламаций:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Элмас" (ООО "Элмас")

Юридический адрес: 141190, г. Фрязино, Заводской пр-д д. 4,

Фактический адрес: 107023, г. Москва, ул. Семеновская Б., д. 40, стр. 2а, оф. 103

ИНН 5052001759, КПП 505201001, ОКПО 31848333

Производитель: Meril Endosurgery Pvt.Ltd. («Мэрил Эндо Сёрджерс Пвт.Лтд.»), Индия.

Third Floor, E1-E3, Meril Park, Syrvey No 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Va Gujarat, India – 396191.


с телефон: +91 39350700, факс: +9139350777

не
в
он
в
в
ак
да
с

й
й
х
с

с
о
й

т

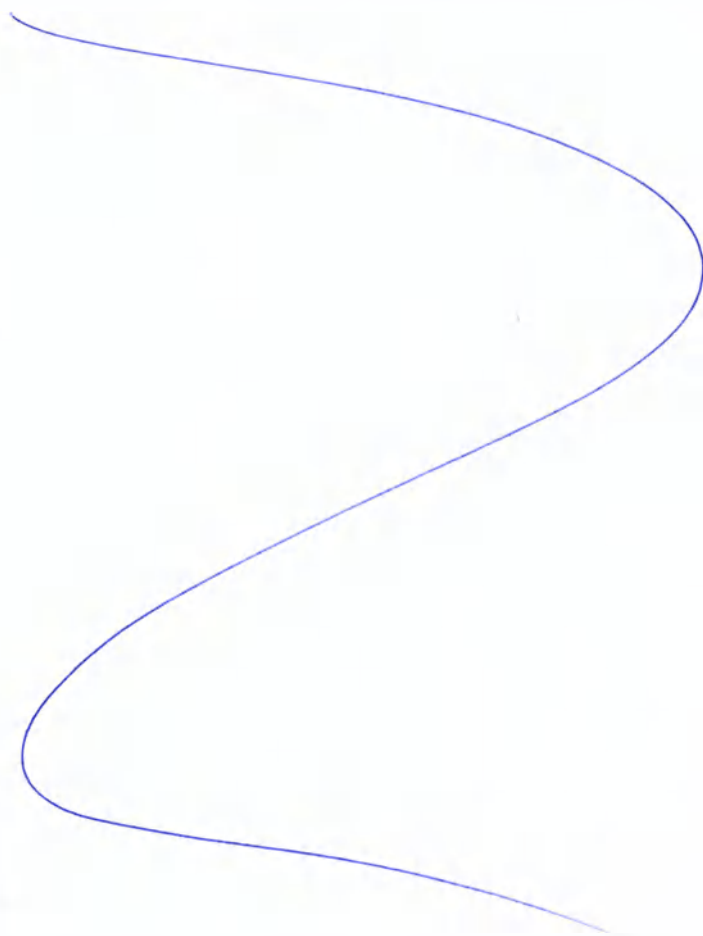

Приложение 1. Номенклатура изделия

I. Материал хирургический шовный не рассасывающийся, в следующих исполнениях:

1. Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAMIDE с иглой, в следующих исполнениях:

NYL1001756, NYL306631, NYL301627, NYL010738, NYL406621, NYL501854, NYL501502, NYL601600, NYL300079, NYL013348, NYL202422, NYL206641, NYL010743, NYL901769, NYL303211, NYL100379, NYL012441, NYL1007000, NYL203256, NYL501858, NYL103227, NYL801765, NYL010757, NYL808170, NYL010729, NYL802812, NYL103250, NYL500661, NYL500532, NYL600507, NYL405503, NYL013257, NYL015415, NYL023259, NYL50 3316, NYL40 3319, NYL60 3320, NYL30 3328, NYL30 3328SL, NYL20 3336, NYL20 3336SL, NYL10 3337, NYL01 3338, NYL10 3346, NYL01 3348, NYL10 3389, NYL100 3718, NYL100 3719, NYL30 3321, NYL10 3340, NYL01 3347, NYL90 3709, NYL601601, NYL501601, NYL601610, NYL501611, NYL401612, NYL601614, NYL501618, NYL401619, NYL401620, NYL301621, NYL601851, NYL501852, NYL401861, NYL200568, NYL100724, NYL100739, NYL100740, NYL100741, NYL010745, NYL300627, NYL1007770, NYL100737, NYL10103080, NYL10103090, NYL015955, NYL020798, NYL200664, NYL5018951, NYL015956, NYL1009060, NYL501719, NYL301625, NYL010680, NYL301622, NYL201626, NYL012797, NYL203232, NYL601615, NYL200795, NYL200776, NYL401618, NYL022407.

2. Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAMIDE без иглы, в следующих исполнениях:

NYS20 903, NYS10 904, NYS01 905, SLS30 212, SLS20 213, SLS10 214, SLS01 215, SLS02 216, SLS03 217, SLS30 222, NYS02 906

3. Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILAPROP с иглой, в следующих исполнениях:

PPL300621, PPL308849, PPL408015, PPL208850, PPL708801, PPL508010, PPL208689, PPL408875, PPL600523, PPL208937, PPL400539, PPL300626, PPL1001713, PPL200987, PPL408665, PPL408879, PPL508662, PPL018450, PPL102815, PPL308392, PPL400839, PPL608873, PPL308731, PPL508881, PPL508882, PPL102820, PPL208852, PPL500527, PPL108470, PPL018475, PPL400525, PPL1001777, PPL408391, PPL102825, PPL508010, PPL902780, PPL608000, PPL30 018, PPL30 800, PPL60 823, PPL30 825, PPL10 830, PPL01 833, PPL30 838, PPL01 840, PPL01 843, PPL20 844, PPL10 846, PPL40 849, PPL40 870, PPL60 873, PPL50 881, PPL50 882DN, PPL01 883, PPL30 887, PPL30 888, PPL50 889, PPL10 894, PPL60 895DN, PPL70 8702, PPL70 8704, PPL70 866ML, PPL80 876ML, PPL70 804, PPL70 812, PPL80 812, PPL80 813, PPL60 818, PPL60 829, PPL50 856, PPL70 866, PPL40 867, PPL60 873, PPL70 873, PPL80 876, PPL60 893, PPG50 810, PPG40 846, PPL70 8701, PPL60 8726, PPL80 8732, PPL70 8735, PPL80 8741, PPL60 8805, PPL40 8845, PPL40 8935, PPL60 8307BL, PPL80 8597, PPL80 8101BL, PPL60 8718, PPL50 8556, PPL60 8726BL, PPL60 8726BX, PPL20 897, PPL20 8937, PPL30 8522, PPL30 8936, PPL40 8521, PPL50 8721, PPL50 8803, PPL50 820, PPL60 8726XL, PPL70 8078, PPL80 8088, PPL80 8086XF, PPL70 8070, PPL70 8078BL, PPL80 8804, PPL60 8804BX, PPL50 8710, PPL40 8557, PPL50 8802BX, PPL60 8802, PPL802777, PPL802777, PPL708304, PPL408355, PPL408557, PPL308558, PPL508663, PPL508666, PPL408666, PPL308667, PPL808703, PPL708704, PPL608706, PPL608707, PPL508711, PPL508721, PPL708725, PPL408761, PPL308770, PPL708802, PPL508803, PPL608803, PPL708813, PPL608814, PPL608815, PPL508816, PPL408840, PPL408845, PPL508893, PPL308936, PPL308976, PPL108434, PPL208523, PPL508556, PPL608617, PPL408617, PPL308665, PPL308684, PPL608697, PPL508698, PPL308832, PPL208833, PPL018432, PPL108424, PPL308687, PPL208685, PPL208977, PPL100830, PPL408682, PPL508711, PPL408683, PPL309556, PPL309557, PPL408204, PPL408861, PPL608776, PPL308861, PPL60871, PPL508757, PPL802774, PPL1002795, PPL20208276, PPL108454, PPL608711, PPL508722, PPL308559, PPL200752, PPL508006, PPL408841, PPL608806, PPL808711

PL608802, PPL308977, PPL200623, PPL012989, PPL308525, PPL408020, PPL308549, PPL308685.

ix. Материал хирургический шовный не рассасывающийся MERICRON XL с иглой, в следующих исполнениях:

2, ME206664, ME406891, ME0132050, ME012991, ME200095, ME0132039, ME500883,
9, ME0132047, ME306683, ME506890, ME100979, ME306759, ME1032046, ME406683,
7, ME106680, ME300636, ME1032049, ME206952, ME206623, ME643, ME646, ME617, ME682,
1, ME683, MME6577, ME673W, MME6555, ME687W, PME617, PME687, PME687W, ME4843,
5, ME6552, ME6597, ME6937, ME6977, ME6978, ME6987, ME617W, ME517G, ME844G, ME655,
0 ME4846, ME301056, ME201062, ME201072, ME506757, ME206760, ME206767, ME406831,
9, ME306832, ME406915, ME506934, ME306936, ME206953, ME306976, ME206997, ME200932,
0, ME306522, ME206523, ME206833, ME200411, ME010518, ME200519, ME202613, ME200553,
, ME200054, ME200873, ME2043122, ME200412, ME500580.

0, Материал хирургический шовный не рассасывающийся FILASILK с иглой, в следующих исполнениях:

5 SLK100792, SLK400536, SLK600529, SLK200367, SLK020794, SLK200790, SLK500581,
, SLK300672, SLK500528, SLK100789, SLK100552, SLK300622, SLK800818, SLK400606,
SLK300765, SLK400524, SLK400671, SLK300379, SLK907059, SLK600593, SLK300576,
к SLK012233, SLK400377, SLK500595, SLK100371, SLK40 5000, SLK30 5003, SLK30 5028,
SLK20 5036, SLK10 5037, SLK40 5050, SLK20 5052, SLK01 5062, SLK50 5079, SLK40 5082,
, SLK30 5085, SLK40 5086, SLK30 5087, SLK20 5331, SLK10 5332, SLK20 5670, SLK012243,
SLK020936, SLK102223, SLK100373, SLK10105039, SLK200333, SLK010723, SLK100334,
SLK200737, SLK10105024, SLK010338, SLK100791, SLK100337, SLK20205222, SLK300684,
SLK3054601, SLK010339, SLK200327, SLK205610, SLK20205225, SLK0115175, SLK100383,
SLK300587, SLK205208, SLK200766, SLK300675, SLK300832, SLK200503, SLK300571,
SLK300632, SLK202052221, SLK300882, SLK30305345, SLK30305325, SLK302508,
SLK20205290, SLK300577, SLK300883, SLK301684, SLK30305319, SLK801822,
SLK20205210, SLK30305390, SLK400629, SLK30305315, SLK400537, SLK202052151,
SLK400683, SLK300588, SLK400736, SLK50505515, SLK80805830, SLK30305310,
SLK400734, SLK40405410, SLK500545, SLK400586, SLK400684, SLK50505521, SLK601732,
SLK601675, SLK500580, SLK500640, SLK500682, SLK402510, SLK107921, SLK012793,
SLK200791, SLK200685, SLK300537, SLK10105076, SLK200584, SLK20205231, SLK200667,
SLK801819, SLK300666, SLK700817, SLK600815, SLK207911, SLK302231, SLK102508.

Перевод с английского языка на русский язык.

Стр. 1/39

УТВЕРЖДЕНО

/подпись/

Санджеев Бхатт

Директор

«28» августа 2015 г.

Печать: /*Мэрил Эндо Сёрджери Пвт. Лтд.*Varі*/

Печать: /*RAMESH CHANDRA TIWARI*ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ* НОТАРИУС*
МАРОЛ, ЭНДЕРИ, МУМБАИ, МАХАРАШТРА* РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 3361*/

Печать: /*НОТАРИУС*ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ* RAMESH CHANDRA
TIWARI*ТРУБОПРОВОД AREA-MAROL*ЭНДЕРИ (Е), МУМБАИ, ШТАТ
МАХАРАШТРА*РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 3361*

Печать: /*ПАЛАТА ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
МАХАРАШТРЫ *12 К. ДУБАШ МАРГ, ФОРТ. МУМБАИ 400 001*/

Штамп: ЗАВЕРЕНО

Штамп: Суджата Паранджпе, Заместитель Секретаря.

/подпись/

Штамп: 31 августа 2015 г.

Штамп: КОПИЯ ВЕРНА, АДВОКАТ И НОТАРИУС RAMESHCHANDRA TIWARI,
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ

(Оборотная сторона)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ

АПОСТИЛЬ

(Гаагская Конвенция от 5 октября 1961 года)

Страна

ИНДИЯ

**Настоящий официальный, относящийся к типу
КОММЕРЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ**

выдан

МЭРИЛ ЭНДО СЕРДЖЕРИ ПВТ. ЛТД.

подписан

СЕКРЕТАРЁМ

скреплен печатью/штампом **ПАЛАТЫ ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МАХАРАШТРЫ**

Удостоверен

Должностным Лицом

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

09 сентября 2015 года

в НЬЮ-ДЕЛИ, ИНДИЯ

за № МНМС0003392815

Печать/Штамп

Подпись

*/*Министерство Иностранных Дел**

/подпись/

Правительство Индии, Нью-Дели №568/*

Штамп: (ПУШПА РАНДЖАН)

Секретарь отделения (Заверение),
Консульский, Паспортный и Визовый
отдел, Министерство Иностранных
Дел, Нью-Дели


*Перевод с английского языка на русский язык выполнил переводчик Коновалов Сергей
Георгиевич.*

Город Москва

Двадцать восьмого сентября две тысячи пятнадцатого года.

Я, Чайлин Сергей Анатольевич, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Милевского Владислава Геннадиевича, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Коноваловым Сергеем Георгиевичем в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 4-10-8750
Взыскано по тарифу: 100 руб.

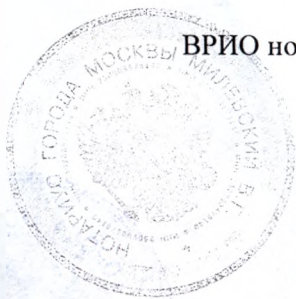

ВРИО нотариуса:

С.А. Чайлин



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 48 (сорок восемь) листов

ВРИО нотариуса

С.А. Чайлин

город Москва

02 ОКТ 2015

Я, Филиппова Ирина Владимировна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность настоящей копии с копии документа. В представленной копии подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в кн. №

Выдано по тарифу

Нотариус



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью _____ листов
Нотариус _____