

**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха по ТУ 32.50.50 – 283 –
10973749 – 2023, варианты исполнения:**

Исполнение 1 - с фурнитурой фиксации на кнопки.

Исполнение 2 - без фурнитуры:

- Тип А длиной 1400 мм;

- Тип Б длиной 1600 мм.

Исполнение 3 - с фурнитурой фиксации на завязки.

Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 22

ФЭСТ®

**Жгут кровоостанавливающий
резиновый Эсмарха**

по ТУ 32.50.50-263-10973749-2023,
исполнение 1 - с фурнитурой фиксации на кнопки
РУ №

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТ Р ИСО 9001
Сертификат выдан АНО «ЦМКС» (№ РОСС RU.0001.13ФК82).

СРОК ГОДНОСТИ - 5 ЛЕТ
с даты изготовления


Исготовлено: 05.2023

Партия № 01

Жгут следует хранить в помещении при температуре от +5° до +25°С и относительной влажности не выше 65% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Жгут не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.
Жгут с истекшим сроком годности относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами. И использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

**Руководство по эксплуатации
Жгута кровоостанавливающего резинового Эсмарха,
исполнения 1 - с фурнитурой фиксации на кнопки**

Наложение жгута.
Жгут накладывают на одежду или подкладывают ткань в месте наложения жгута.
Жгут подводят под конечность выше раны. Затем захватывают его у конца и в средней части, растягивают и, уже в растянутом виде, обертывают вокруг конечности. Первый тур жгута должен быть самым тугим, последующие - более слабыми. Постепенно уменьшая растяжение резины, жгут закрепляют на конечности с помощью кнопок. Туры его укладывают достаточно плотно друг к другу, чтобы избежать ущемления тканей между ними.
Критерием правильности наложения жгута является полное прекращение кровотечения или прекращение прощупывания пульса.
Срок наложения жгута составляет 2 часа независимо от температуры окружающей среды. К жгуту прикрепляют бирку с указанием времени наложения или аналогичная запись делается прямо на жгуте.
Если по прошествии указанного времени пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, то необходимо:
1. осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута;
2. ослабить или снять жгут на 10-15 минут;
3. вновь затянуть жгут или переложить его несколько выше;
4. отпустить пальцевое прижатие, убедиться в отсутствии кровотечения.

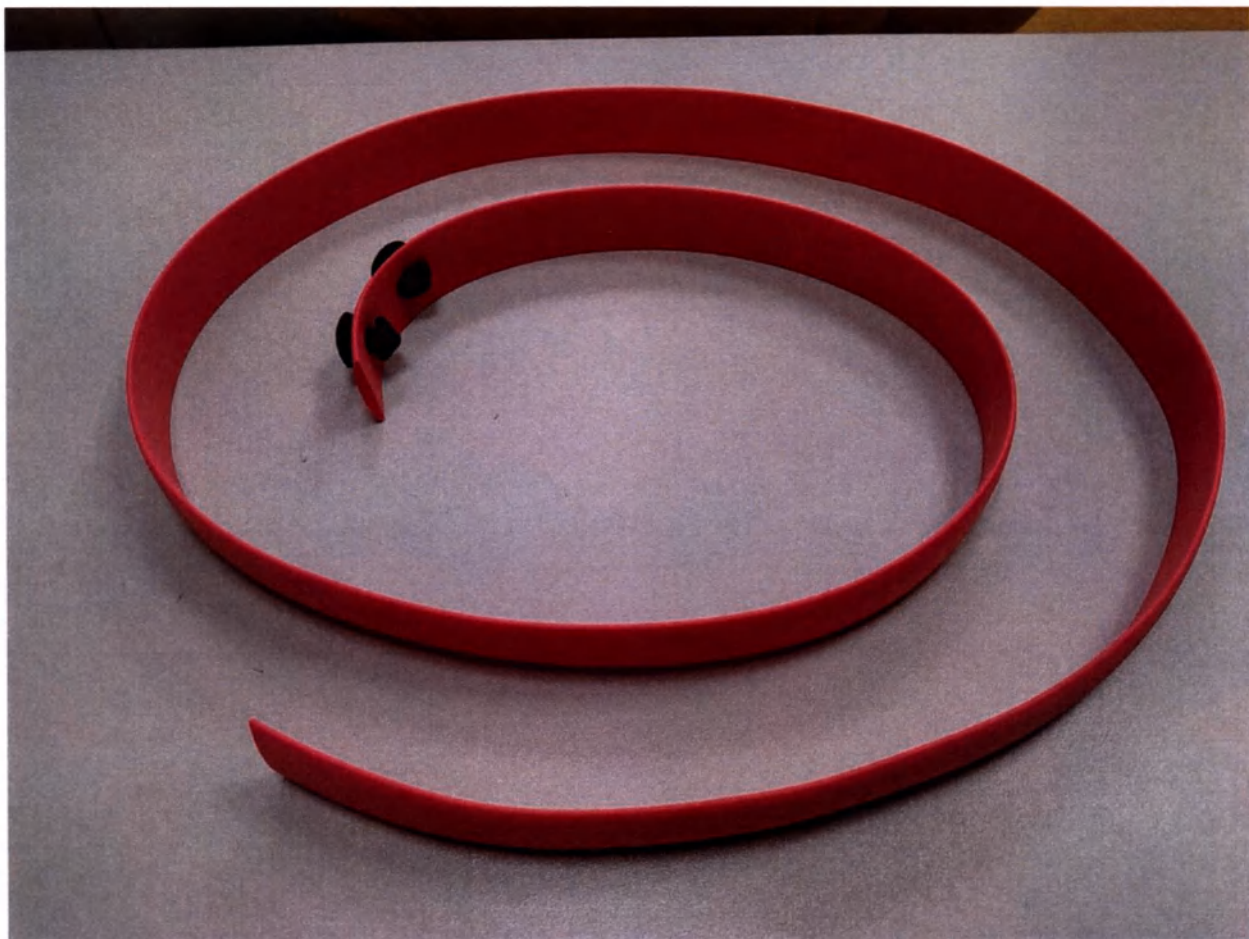

**Общий вид Жгута кровоостанавливающего резинового Эсмарха по ТУ
32.50.50 – 283 – 10973749 – 2023, Исполнение 1 - с фурнитурой фиксации на
кнопки**

Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23

ФЭСТ®

**Жгут кровоостанавливающий
резиновый Эсмарха**

по ТУ 32.50.50-283-10973749-2023,
исполнение 2 - без фурнитуры,
Тип А длиной 1400 мм

РУ №

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТ Р ИСО 9001
Сертификат выдан АНО «ЦМК» (№ РОСС RU.0001.13ФК82).

СРОК ГОДНОСТИ - 5 ЛЕТ

с даты изготовления

Изготовлено 05.2023

Партия № 01

Жгут следует хранить в помещении при температуре от +5° до +25°С и относительной влажности не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Жгут не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину. Жгут с истекшим сроком годности относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами. Использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Руководство по эксплуатации

**Жгута кровоостанавливающего резинового Эсмарха,
исполнения 2 - без фурнитуры, Тип А длиной 1400 мм**

Наложение жгута.

Жгут накладывают на одежду или подкладывают ткань в месте наложения жгута.

Жгут подводят под конечность выше раны. Затем захватывают его у конца и в средней части, растягивают и, уже в растянутом виде, обертывают вокруг конечности. Первый тур жгута должен быть самым тугим, последующие - более слабыми. Постепенно уменьшая растяжение резины, жгут закрепляют на конечности, завязав узел. Туры его укладывают достаточно плотно друг к другу, чтобы избежать ущемления тканей между ними.

Критерием правильности наложения жгута является полное прекращение кровотечения или прекращение прощупывания пульса. Срок наложения жгута составляет 2 часа независимо от температуры окружающей среды. К жгуту прикрепляют бирку с указанием времени наложения или аналогичная запись делается прямо на жгуте.

Если по прошествии указанного времени пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, то необходимо:

1. осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута;
2. ослабить или снять жгут на 10-15 минут;
3. вновь затянуть жгут или переложить его несколько выше;
4. отпустить пальцевое прижатие, убедиться в отсутствии кровотечения.



**Общий вид Жгута кровоостанавливающего резинового Эсмарха по ТУ
32.50.50 – 283 – 10973749 – 2023, Исполнение 2 - без фурнитуры,
Типа А длиной 1400 мм**

Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 6
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23

ФЭСТ®

**Жгут кровоостанавливающий
резиновый Эсмарха**

по ТУ 32.50.50-283-10973749-2023,
исполнение 2 - без фурнитуры.

Тип Б длиной 1600 мм

РУ №

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТ Р ИСО 9001
Сертификат выдан АНО «ЦМК» (№ РОСС RU.0001.13ФК62).

СРОК ГОДНОСТИ - 5 ЛЕТ

с даты изготовления

Изготовлено 05.2023

Партия № 01

Жгут следует хранить в помещении при температуре от +5° до +25°С и
открытой влажности не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных
приборов. Жгут не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей,
бензина, спирта, щелочей и других веществ, разрушающих резину.
Жгут с истекшим сроком годности относится к отходам класса А и утилизируется
в соответствии с СанПиН 2.1.3682-21 или вместе с бытовыми отходами.
Использованный жгут относится к отходам класса Б
и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3682-21.

**Руководство по эксплуатации
Жгута кровоостанавливающего резинового Эсмарха,
исполнения 2 - без фурнитуры, тип Б длиной 1600 мм**


Наложение жгута.

Жгут накладывают на одежду или подкладывают ткань в месте
наложения жгута.
Жгут подводят под конечность выше раны. Затем захватывают его у
конца и в средней части, растягивают и, уже в растянутом виде,
обертывают вокруг конечности. Первый тур жгута должен быть самым
тутким, последующие - более слабыми. Постепенно уменьшая
растяжение резины, жгут закрепляют на конечности, завязав узел.
Тур его укладывают достаточно плотно друг к другу, чтобы избежать
ущемления тканей между ними.
Критерием правильности наложения жгута является полное
прекращение кровотечения или прекращение прощупывания пульса.
Срок наложения жгута составляет 2 часа независимо от температуры
окружающей среды. К жгуту прикрепляют бирку с указанием времени
наложения или аналогичная запись делается прямо на жгуте.
Если по прошествии указанного времени пострадавший не доставлен
в лечебное учреждение, то необходимо:
1. осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута;
2. ослабить или снять жгут на 10-15 минут;
3. вновь затянуть жгут или переложить его на несколько выше;
4. отпустить пальцевое прижатие, убедиться в отсутствии
кровотечения.



**Общий вид Жгута кровоостанавливающего резинового Эсмарха по ТУ
32.50.50 – 283 – 10973749 – 2023, Исполнение 2 - без фурнитуры,
Типа Б длиной 1600 мм**

Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23

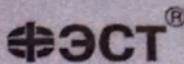

**Жгут кровоостанавливающий
резиновый Эсмарха**
по ТУ 32.50.50-283-10973749-2023,
исполнение 3 - с фурнитурой фиксации на завязки
РУ №

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТ Р ИСО 9001
Сертификат выдан АНО «ЦМКС» (№ РОСС RU.0001.13ФК82).

СРОК ГОДНОСТИ - 5 ЛЕТ
с даты изготовления

Изготовлено 05.2023

Партия № 01

Жгут следует хранить в помещении при температуре от +5° до +25°С и относительной влажности не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Жгут не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину. Жгут с истекшим сроком годности относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами. И использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

**Руководство по эксплуатации
Жгута кровоостанавливающего резинового Эсмарха,
исполнения 3 - с фурнитурой фиксации на завязки**

Наложение жгута.

Жгут накладывают на одежду или подкладывают ткань в месте наложения жгута.

Жгут подводят под конечность выше раны. Затем захватывают его у конца и в средней части, растягивают и, уже в растянутом виде, обертывают вокруг конечности. Первый тур жгута должен быть самым тугим, последующие - более слабыми. Постепенно уменьшая растяжение резины, закрепляют жгут на конечности с помощью завязок. Туры его укладывают достаточно плотно друг к другу, чтобы избежать ущемления тканей между ними.

Критерием правильности наложения жгута является полное прекращение кровотечения или прекращение прощупывания пульса. Срок наложения жгута составляет 2 часа независимо от температуры окружающей среды. К жгуту прикрепляют бирку с указанием времени наложения или аналогичная запись делается прямо на жгуте. Если по прошествии указанного времени пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, то необходимо:

1. осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута;
2. ослабить или снять жгут на 10-15 минут;
3. вновь затянуть жгут или переложить его несколько выше;
4. отпустить пальцевое прижатие, убедиться в отсутствии кровотечения.



**Общий вид Жгута кровоостанавливающего резинового Эсмарха по ТУ
32.50.50 – 283 – 10973749 – 2023, Исполнение 3 - с фурнитурой фиксации на
завязки**

Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23



Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха

по ТУ 32.50.50-283-10973749-2023,
исполнение 1 - с фурнитурой фиксации на кнопки
РУ №

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТ Р ИСО 9001
Сертификат выдан АНО «ЦМКС» (№ РОСС RU.0001.13ФК82).

СРОК ГОДНОСТИ - 5 ЛЕТ
с даты изготовления

Изготовлено 05.2023

Партия № 01

Жгут следует хранить в помещении при температуре от +5° до +25°С и относительной влажности не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Жгут не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

Жгут с истекшим сроком годности относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами. Использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Руководство по эксплуатации Жгута кровоостанавливающего резинового Эсмарха, исполнения 1 - с фурнитурой фиксации на кнопки

Наложение жгута.

Жгут накладывают на одежду или подкладывают ткань в месте наложения жгута.

Жгут подводят под конечность выше раны. Затем захватывают его у конца и в средней части, растягивают и, уже в растянутом виде, обертывают вокруг конечности. Первый тур жгута должен быть самым тугим, последующие - более слабыми. Постепенно уменьшая растяжение резины, жгут закрепляют на конечности с помощью кнопок. Туры его укладывают достаточно плотно друг к другу, чтобы избежать ущемления тканей между ними.

Критерием правильности наложения жгута является полное прекращение кровотечения или прекращение прощупывания пульса. Срок наложения жгута составляет 2 часа независимо от температуры окружающей среды. К жгуту прикрепляют бирку с указанием времени наложения или аналогичная запись делается прямо на жгуте.

Если по прошествии указанного времени пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, то необходимо:

1. осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута;
2. ослабить или снять жгут на 10-15 минут;
3. вновь затянуть жгут или переложить его несколько выше;
4. отпустить пальцевое прижатие, убедиться в отсутствии кровотечения.

Общий вид маркировки Жгута кровоостанавливающего резинового Эсмарха
по ТУ 32.50.50 – 283 – 10973749 – 2023, Исполнение 1 - с фурнитурой
фиксации на кнопки

Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23



Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха

по ТУ 32.50.50-283-10973749-2023,
исполнение 2 - без фурнитуры,
Тип А длиной 1400 мм

РУ №

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТ Р ИСО 9001
Сертификат выдан АНО «ЦМКС» (№ РОСС RU.0001.13ФК82).

СРОК ГОДНОСТИ - 5 ЛЕТ
с даты изготовления

Изготовлено 05.2023

Партия № 01

Жгут следует хранить в помещении при температуре от +5° до +25°С и относительной влажности не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Жгут не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

Жгут с истекшим сроком годности относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами. Использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Руководство по эксплуатации Жгута кровоостанавливающего резинового Эсмарха, исполнения 2 - без фурнитуры, Тип А длиной 1400 мм

Наложение жгута.

Жгут накладывают на одежду или подкладывают ткань в месте наложения жгута.

Жгут подводят под конечность выше раны. Затем захватывают его у конца и в средней части, растягивают и, уже в растянутом виде, обертывают вокруг конечности. Первый тур жгута должен быть самым тугим, последующие - более слабыми. Постепенно уменьшая растяжение резины, жгут закрепляют на конечности, завязав узел.

Туры его укладывают достаточно плотно друг к другу, чтобы избежать ущемления тканей между ними.

Критерием правильности наложения жгута является полное прекращение кровотечения или прекращение прощупывания пульса.

Срок наложения жгута составляет 2 часа независимо от температуры окружающей среды. К жгуту прикрепляют бирку с указанием времени наложения или аналогичная запись делается прямо на жгуте.

Если по прошествии указанного времени пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, то необходимо:

1. осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута;
2. ослабить или снять жгут на 10-15 минут;
3. вновь затянуть жгут или переложить его несколько выше;
4. отпустить пальцевое прижатие, убедиться в отсутствии кровотечения.

Общий вид маркировки Жгута кровоостанавливающего резинового Эсмарха
по ТУ 32.50.50 – 283 – 10973749 – 2023, Исполнение 2 - без фурнитуры,
Тип А длиной 1400 мм

Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23



Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха

по ТУ 32.50.50-283-10973749-2023,
исполнение 2 - без фурнитуры,
Тип Б длиной 1600 мм

РУ №

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТ Р ИСО 9001
Сертификат выдан АНО «ЦМКС» (№ РОСС RU.0001.13ФК82).

СРОК ГОДНОСТИ - 5 ЛЕТ
с даты изготовления

Изготовлено 05.2023

Партия № 01

Жгут следует хранить в помещении при температуре от +5° до +25°С и относительной влажности не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Жгут не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

Жгут с истекшим сроком годности относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами. И использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Руководство по эксплуатации Жгута кровоостанавливающего резинового Эсмарха, исполнения 2 - без фурнитуры, Тип Б длиной 1600 мм

Наложение жгута.

Жгут накладывают на одежду или подкладывают ткань в месте наложения жгута.

Жгут подводят под конечность выше раны. Затем захватывают его у конца и в средней части, растягивают и, уже в растянутом виде, обертывают вокруг конечности. Первый тур жгута должен быть самым тугим, последующие - более слабыми. Постепенно уменьшая растяжение резины, жгут закрепляют на конечности, завязав узел.

Туры его укладывают достаточно плотно друг к другу, чтобы избежать ущемления тканей между ними.

Критерием правильности наложения жгута является полное прекращение кровотечения или прекращение прощупывания пульса. Срок наложения жгута составляет 2 часа независимо от температуры окружающей среды. К жгуту прикрепляют бирку с указанием времени наложения или аналогичная запись делается прямо на жгуте.

Если по прошествии указанного времени пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, то необходимо:

1. осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута;
2. ослабить или снять жгут на 10-15 минут;
3. вновь затянуть жгут или переложить его несколько выше;
4. отпустить пальцевое прижатие, убедиться в отсутствии кровотечения.

Общий вид маркировки Жгута кровоостанавливающего резинового Эсмарха
по ТУ 32.50.50 – 283 – 10973749 – 2023, Исполнение 2 - без фурнитуры,
Тип Б длиной 1600 мм

Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23

ФЭСТ®

Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха

по ТУ 32.50.50-283-10973749-2023,
исполнение 3 - с фурнитурой фиксации на завязки
РУ №

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТ Р ИСО 9001
Сертификат выдан АНО «ЦМКС» (№ РОСС RU.0001.13ФК82).

СРОК ГОДНОСТИ - 5 ЛЕТ
с даты изготовления

Изготовлено 05.2023

Партия № 01

Жгут следует хранить в помещении при температуре от +5° до +25°С и относительной влажности не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Жгут не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

Жгут с истекшим сроком годности относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами. И использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Руководство по эксплуатации Жгута кровоостанавливающего резинового Эсмарха, исполнения 3- с фурнитурой фиксации на завязки

Наложение жгута.

Жгут накладывают на одежду или подкладывают ткань в месте наложения жгута.


Жгут подводят под конечность выше раны. Затем захватывают его у конца и в средней части, растягивают и, уже в растянутом виде, обертывают вокруг конечности. Первый тур жгута должен быть самым тугим, последующие - более слабыми. Постепенно уменьшая растяжение резины, закрепляют жгут на конечности с помощью завязок. Туры его укладывают достаточно плотно друг к другу, чтобы избежать ущемления тканей между ними.

Критерием правильности наложения жгута является полное прекращение кровотечения или прекращение прощупывания пульса. Срок наложения жгута составляет 2 часа независимо от температуры окружающей среды. К жгуту прикрепляют бирку с указанием времени наложения или аналогичная запись делается прямо на жгуте.

Если по прошествии указанного времени пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, то необходимо:

1. осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута;
2. ослабить или снять жгут на 10-15 минут;
3. вновь затянуть жгут или переложить его несколько выше;
4. отпустить пальцевое прижатие, убедиться в отсутствии кровотечения.

Общий вид маркировки Жгута кровоостанавливающего резинового Эсмарха
по ТУ 32.50.50 – 283 – 10973749 – 2023, Исполнение 3 - с фурнитурой
фиксации на завязки

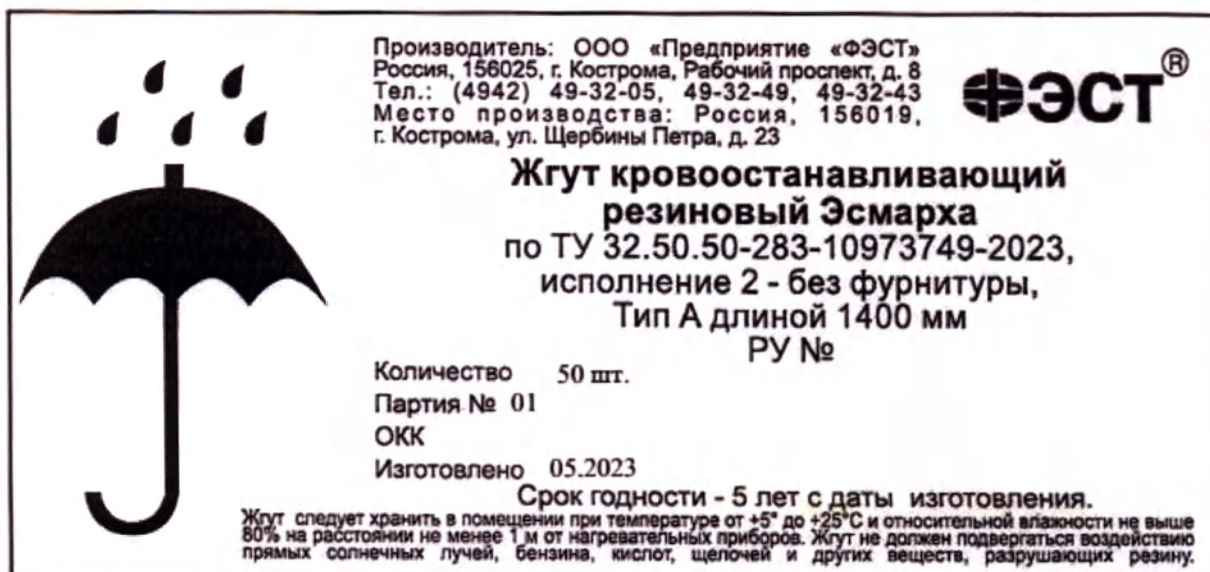

Общий вид маркировки транспортной упаковки на примере Жгута
кровоостанавливающего резинового Эсмарха по ТУ 32.50.50 – 283 – 10973749
– 2023, Исполнение 2 - без фурнитуры, Типа А длиной 1400 мм



Общий вид транспортной тары на примере Жгута кровоостанавливающего резинового Эсмарха по ТУ 32.50.50 – 283 – 10973749 – 2023, Исполнения 2 - без фурнитуры, Типа А длиной 1400 мм.

Прошито, пронумеровано,
опечатано

15 (Пятнадцать) листов

Директор Шахов Д.А.

