


Фотографические изображения медицинского изделия и макет маркировки

Гель "Оптимед" для замещения жидких сред глаза в комплекте с канюлей глазной


ТУ 32.50.13-004-29792921-2019




Гель во флаконе 3 мл с укупорочной пробкой и алюминиевым колпачком

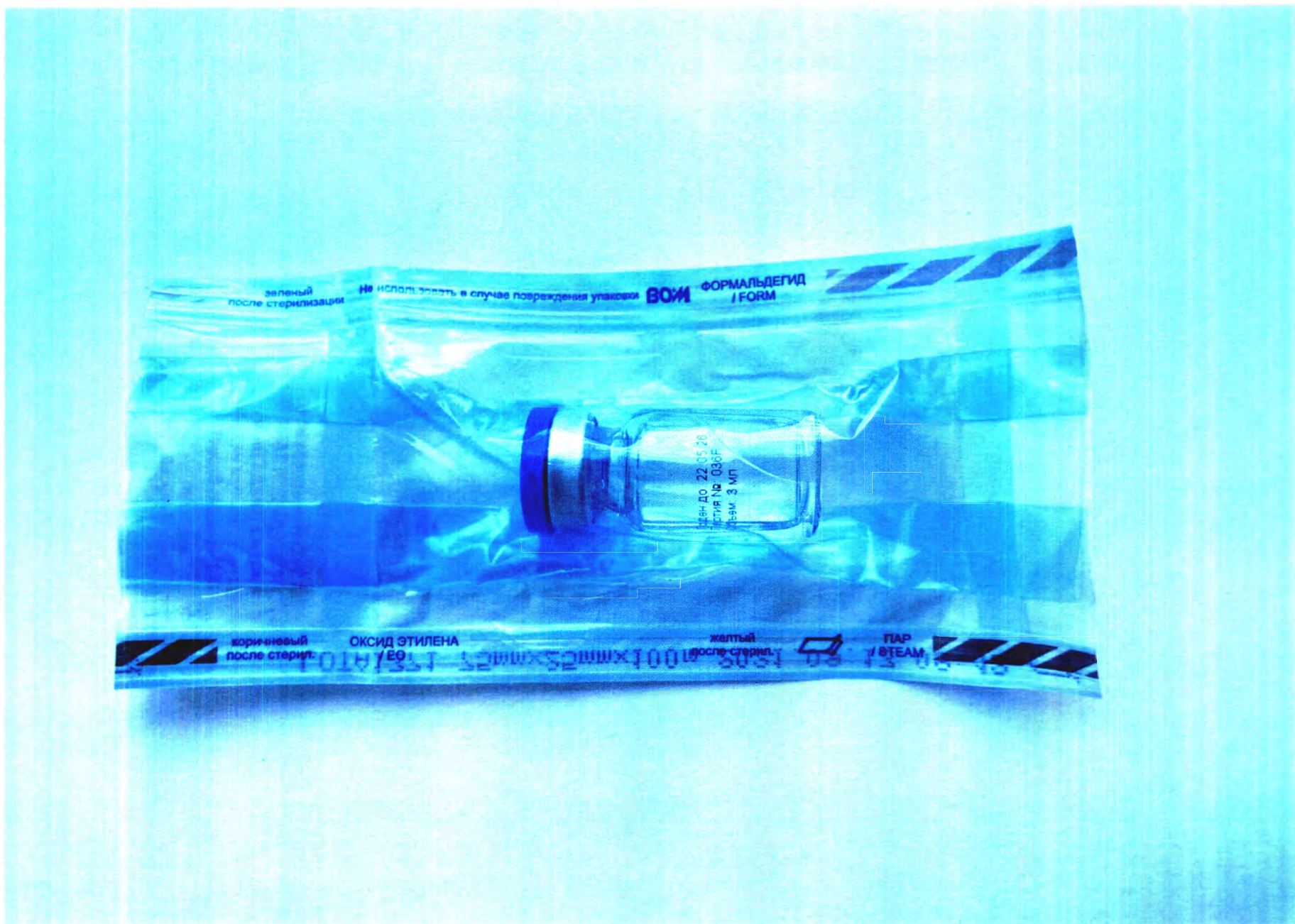

Упаковка стерилизационная Гель во флаконе 3 мл с укупорочной пробкой и алюминиевым колпачком

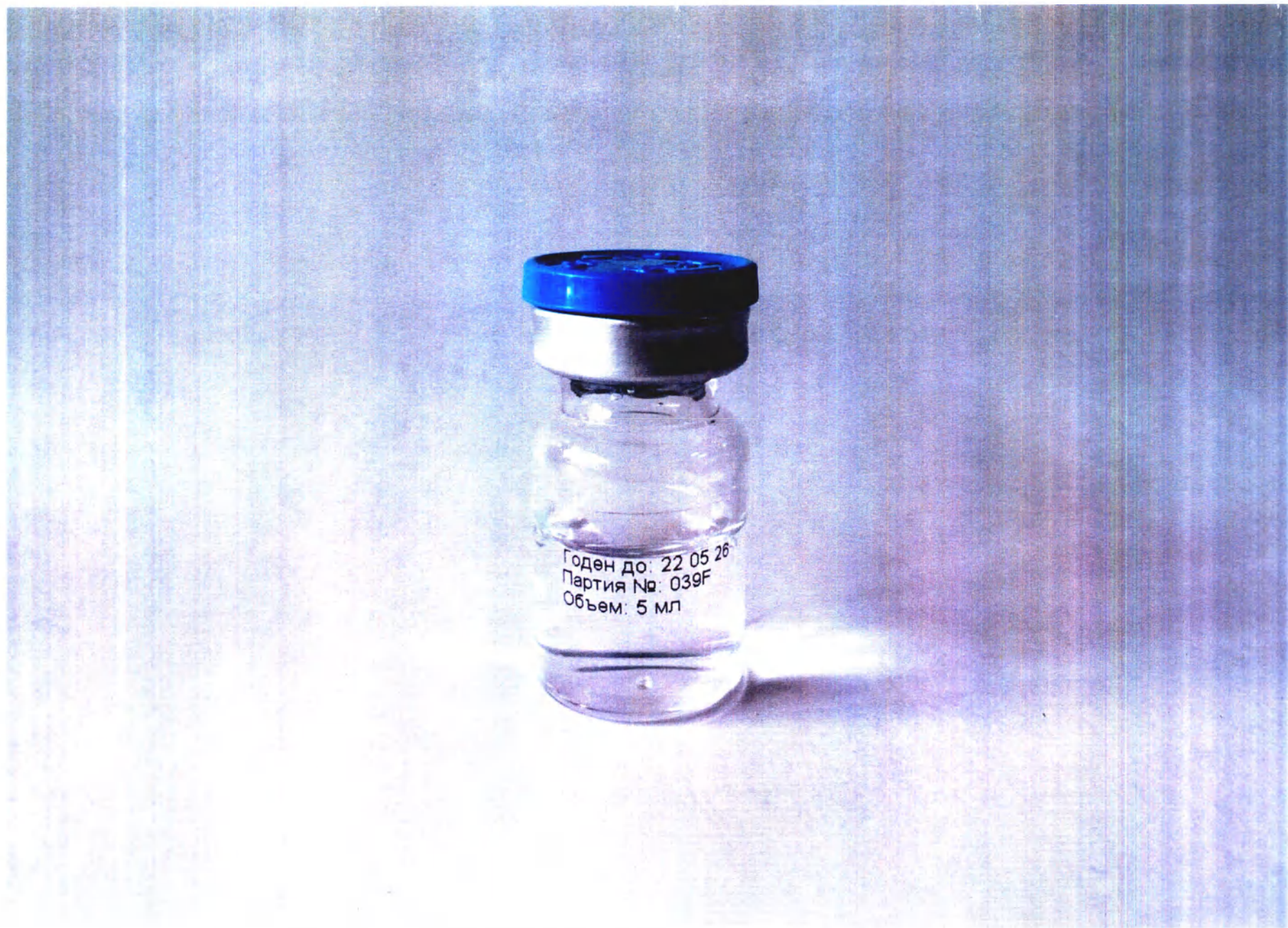

Гель во флаконе 5 мл с укупорочной пробкой и алюминиевым колпачком

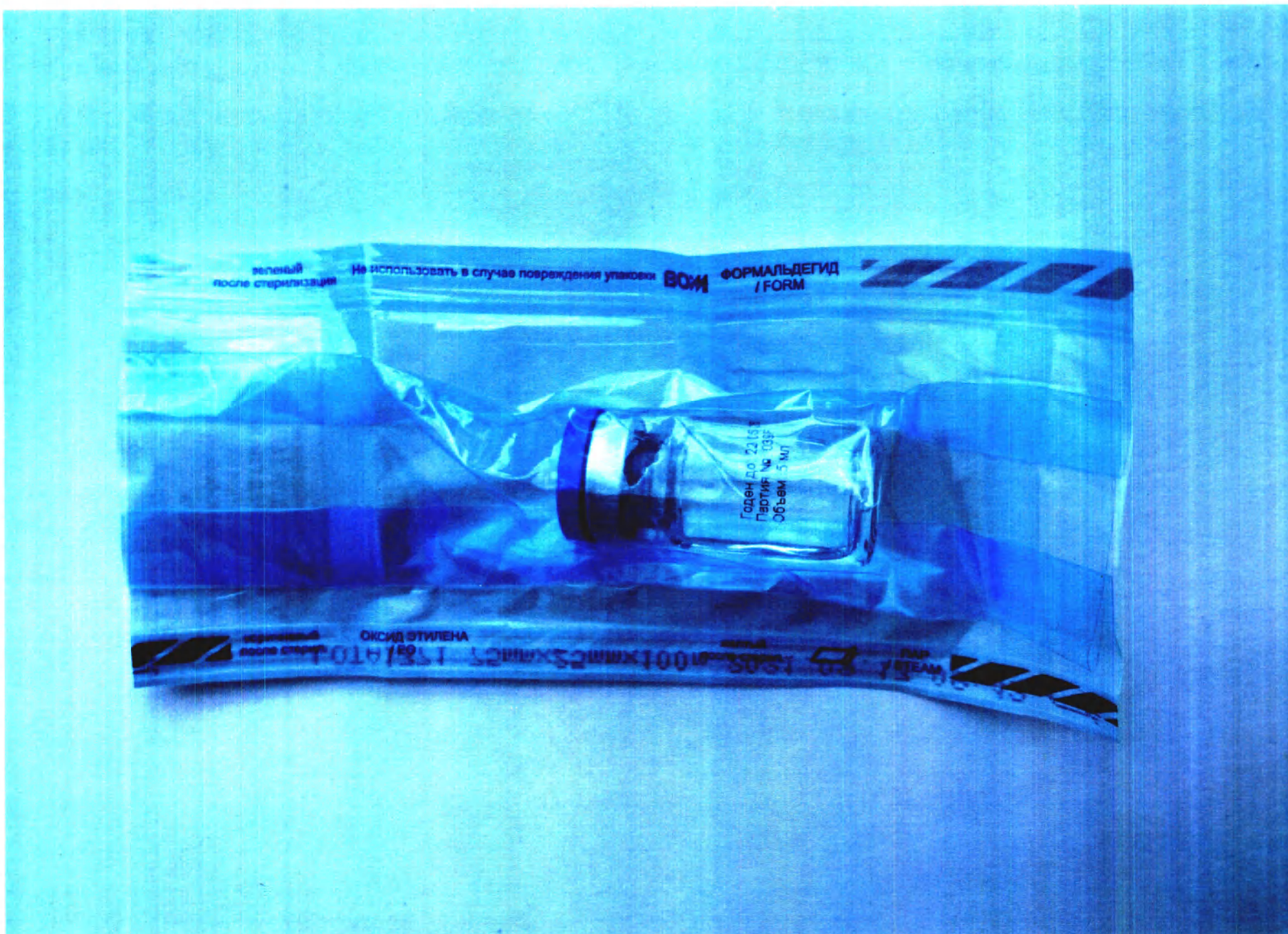


Упаковка стерилизационная Геля во флаконе 5 мл с укупорочной пробкой и алюминиевым колпачком




Геля во флаконе 10 мл с укупорочной пробкой и алюминиевым колпачком



Упаковка стерилизационная Геля во флаконе 10 мл с укупорочной пробкой и алюминиевым колпачком

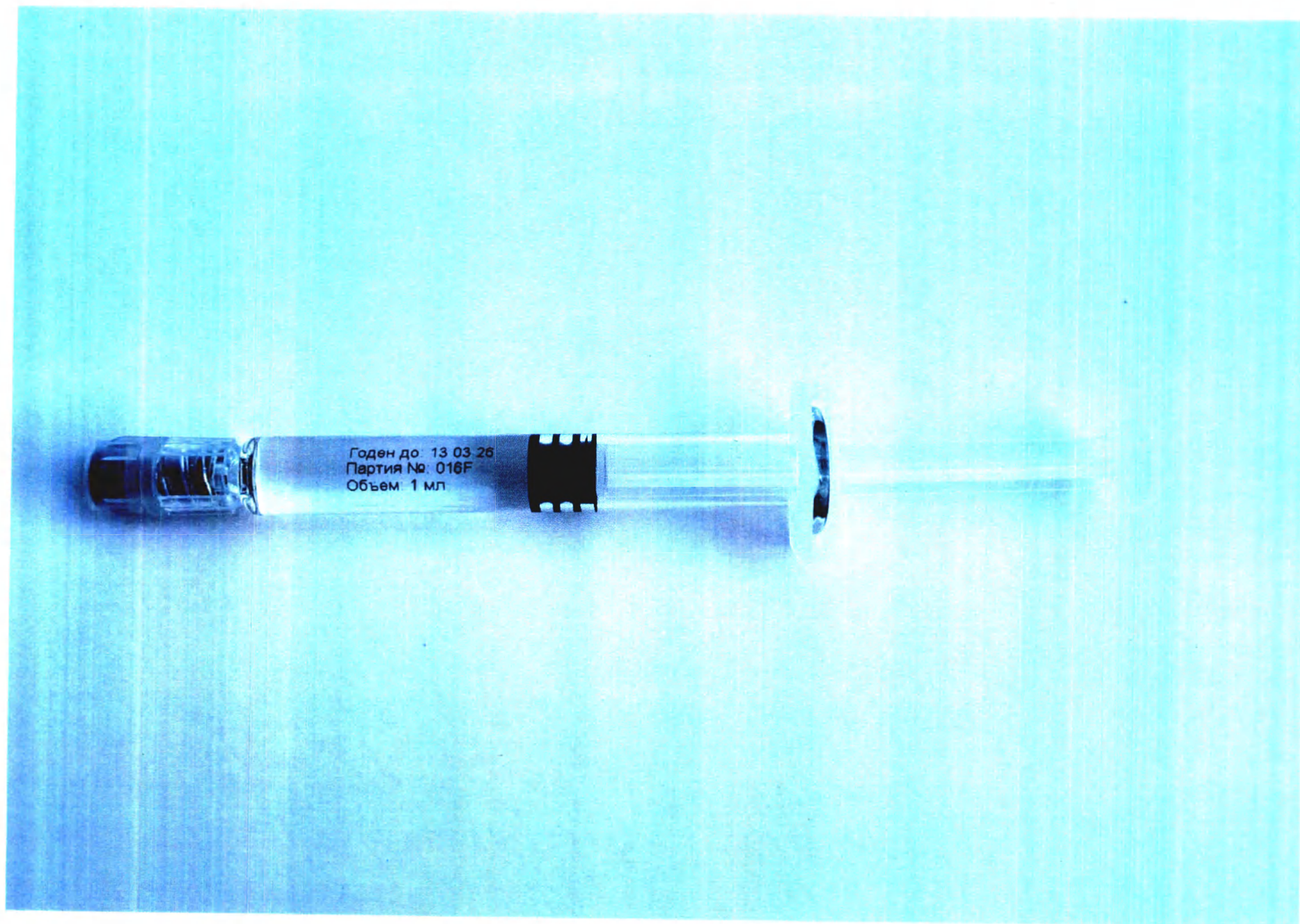


Гель в шприце 1 мл

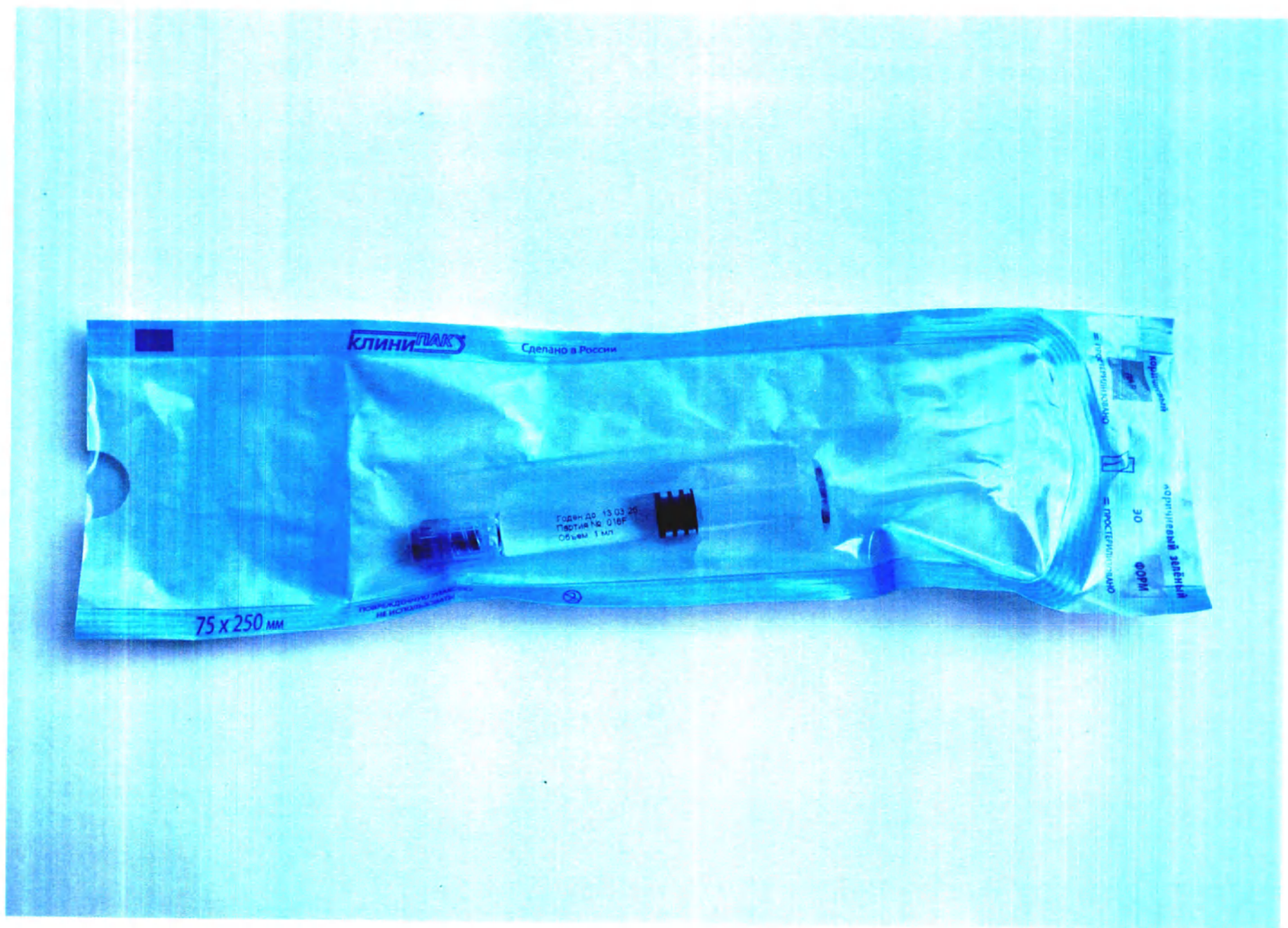


Упаковка стерилизационная Гель в шприце 1 мл




Гель в шприце 2 мл

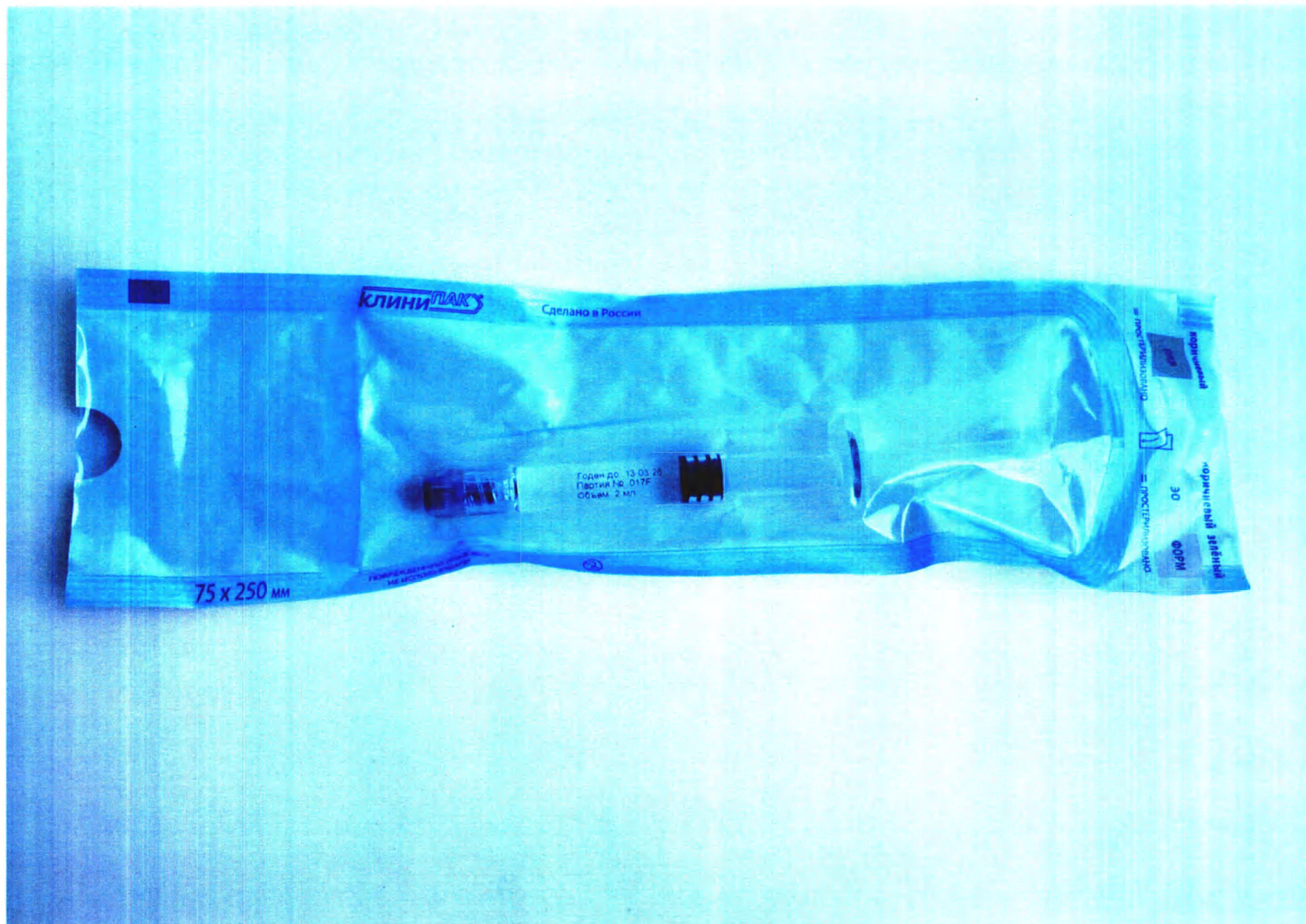


Упаковка стерилизационная Геля в шприце 2 мл

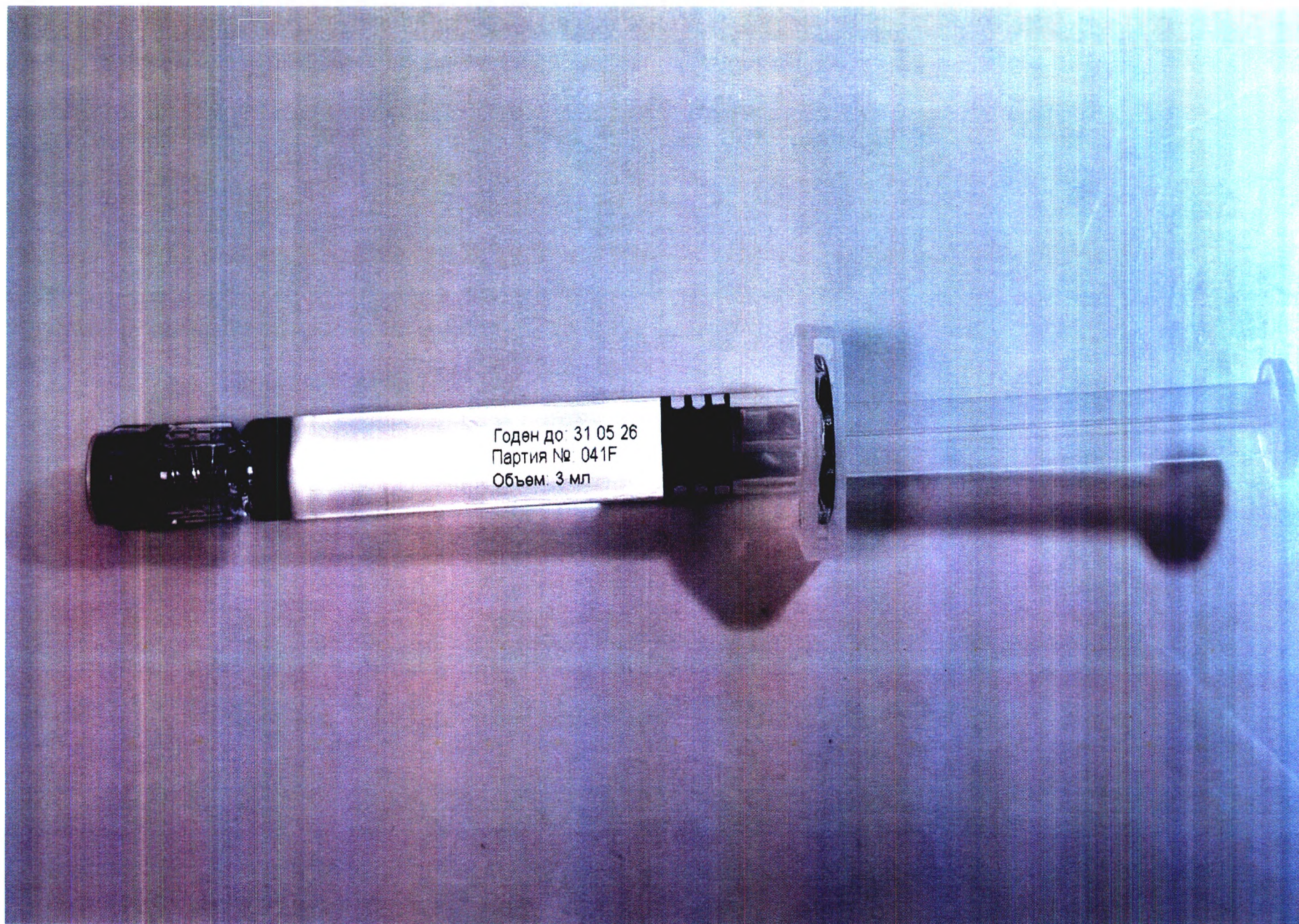


Гель в шприце 3 мл

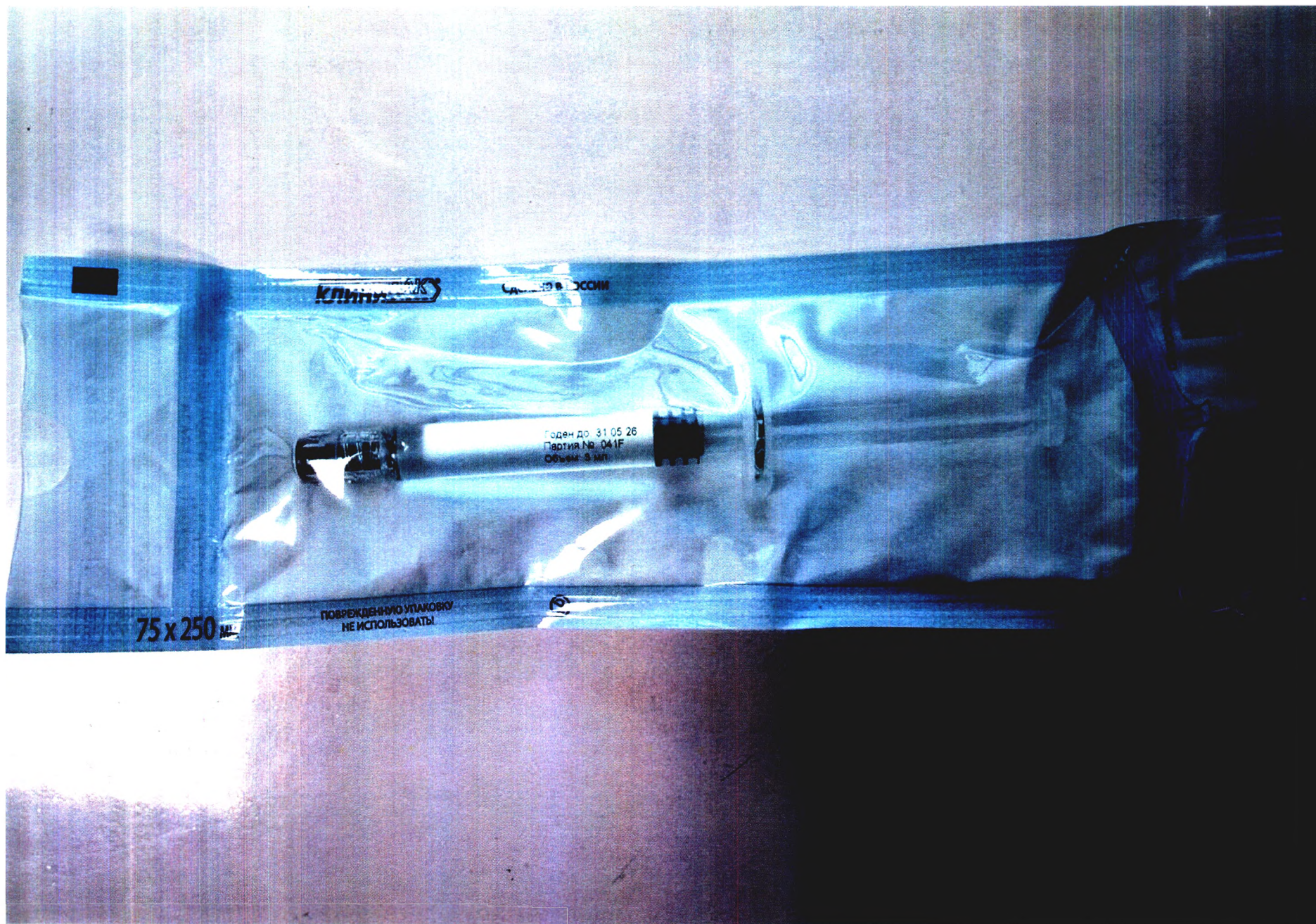


Упаковка стерилизационная Гель в шприце 3 мл

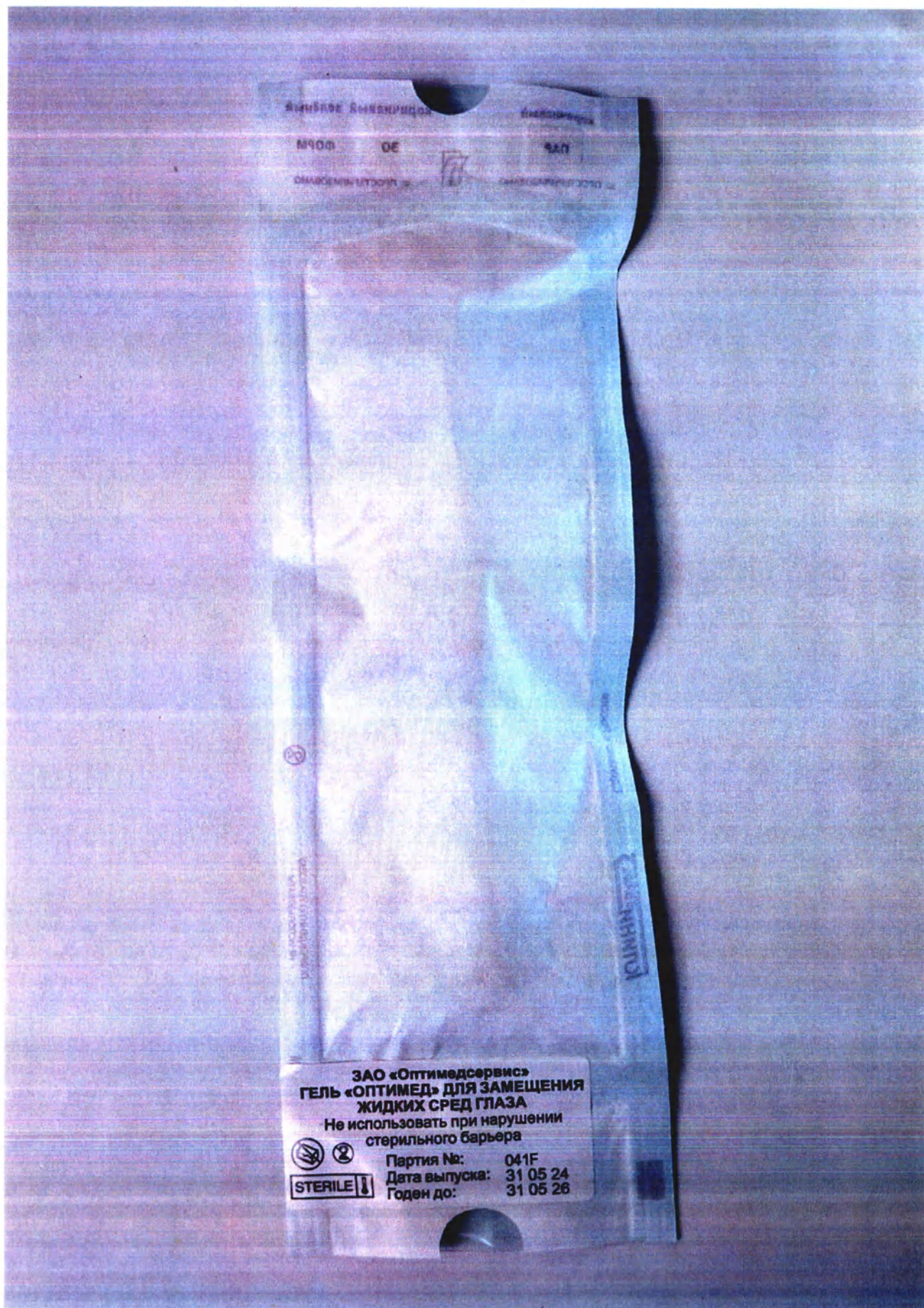

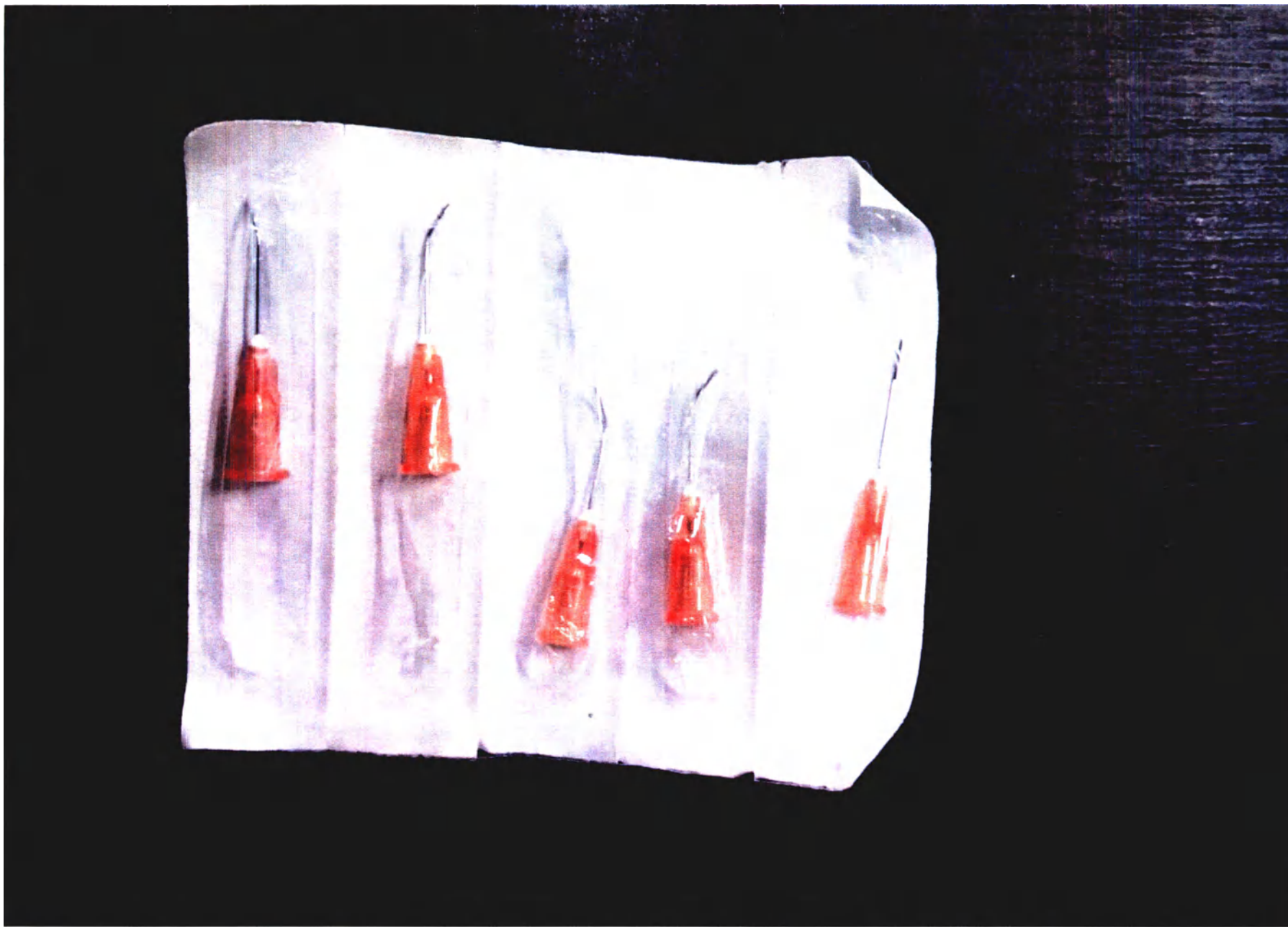

Упаковка Канюля глазная однократного применения стерильная

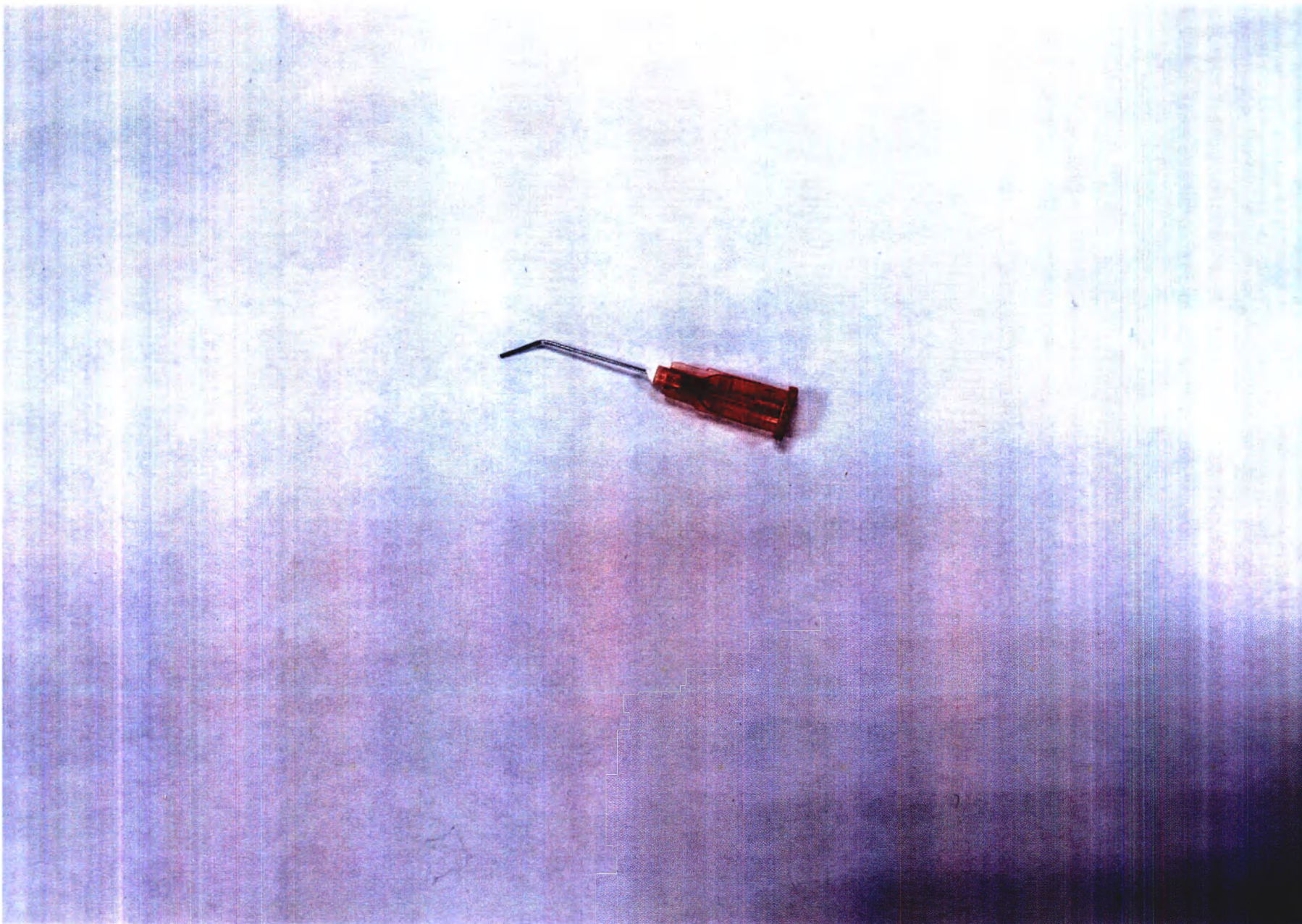

Канюля глазная однократного применения стерильная

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«ГЕЛЬ "ОПТИМЕД" ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ЖИДКИХ СРЕД ГЛАЗА В КОМПЛЕКТЕ С КАНЮЛЕЙ ГЛАЗНОЙ ПО ТУ 32.50.13-004-29792921-2019»

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Гель "Оптимед" для замещения жидких сред глаза в комплекте с канюлей глазной по ТУ 32.50.13-004-29792921-2019» в комплекте:

I. Комплект:

-Гель во флаконе 3, 5 или 10 мл с укупорочной пробкой и алюминиевыми колпачками- не более 10 шт.

-Канюли глазные однократного применения стерильные – не более 10 шт.;

-Инструкция по применению-1 шт.

II. Комплект:

-Гель в шприце 1, 2 или 3 мл - не более 10 шт.;

-Канюли глазные однократного применения стерильные-не более 10 шт.;

-Инструкция по применению -1 шт.

РАЗРАБОТЧИК/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО «Оптимедсервис», Россия, 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина д. 145

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ЗАО «Оптимедсервис», Россия, 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина д. 145

Инструкция по применению

ГЕЛЬ «ОПТИМЕД» ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ЖИДКИХ СРЕД ГЛАЗА
в комплекте с канюлей глазной
по ТУ 32.50.13-004-29792921-2019

объем одного шприца: ☒ 1,0 мл ☐ 2,0 мл ☐ 3,0 мл



Упаковка Гель в шприце

ГЕЛЬ «ОПТИМЕД» ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ЖИДКИХ СРЕД ГЛАЗА
в комплекте с канюлей глазной
по ту 32.50.13-004-29792921-2019

объем одного шприца: ☒ 1,0 мл ☐ 2,0 мл ☐ 3,0 мл

Упаковка Гель в шприце

ГЕЛЬ «ОПТИМЕД» ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ЖИДКИХ СРЕД ГЛАЗА
в комплекте с канюлей глазной
по ту 32.50.13-004-29792921-2019

объем одного шприца: ☐ 1,0 мл ☐ 2,0 мл ☒ 3,0 мл

Упаковка Гель в шприце

**ГЕЛЬ «ОПТИМЕД»
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ЖИДКИХ СРЕД ГЛАЗА**

В комплекте с канюлей глазной
по ТУ 32.50.13-004-29792921-2019

Одноразовый

СТЕРИЛЬНО

**1 шприц содержит
гидроксипропил-
метилцеллюлозы 2% 3 мл**

Дата выпуска: 31 05 24

Годен до: 31 05 26

Партия №: 041F

Упаковка Гель в шприце

Гель «Оптимед» для замещения жидких сред глаза в комплекте с канюлей глазной по
ТУ 32.501.13-004-29792921-2019 – предназначен при проведении хирургических процедур
на переднем отрезке глаза, поддерживает глубину передней камеры, защищает
эндотелий роговицы и другие прилегающие структуры глаза, улучшает визуализацию.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

«Гель «Оптимед» применяется в лечебных учреждениях в качестве защитного агента и
для поддержания глубины передней камеры при внутриглазных операциях в
офтальмохирургии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

«Гель «Оптимед» вводится в переднюю камеру глаза с помощью канюли. Инъекцию
можно проводить как до, так и после удаления хрусталика. В конце операции
основная масса препарата вымывается из передней камеры глаза ирригационным
раствором (не поставляется в комплекте). «Гель «Оптимед» наносится также на
поверхность роговицы - оберегает ее от высыхания, предотвращает слущивание эпителия
и улучшает визуальный контроль за ходом операции. Если во время хирургической
манипуляции количество введенного ранее геля недостаточно, можно ввести
дополнительный объем.

Упаковка Гель в шприце

Гель "Оптимед" для замещения жидких сред глаза
в комплекте с канюлей глазной
по ТУ 32.50.13-004-29792921-2019 в комплекте

- Гель во флаконе 3, 5 или 10 мл с укупорочной пробкой и алюминиевыми колпачками - 10 шт.
- Канюли глазные однократного применения стерильные - 10 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.

STERILE



ТУ 32.50.13-004-29792921-2019
ру №

Стерильность гарантирована при условии целостности упаковки и не повреждена! Только для однократного использования.
Недопустимость применения в случае нарушения целостности упаковки.
Условия хранения: при температуре от +5 до +25 °С и относительной влажности не более 80% при +25 °С.
Условия транспортирования: при температуре от +5 до +25 °С и относительной влажности не более 80% при +25 °С.

РАЗРАБОТЧИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО «Оптимедсервис», Россия.

453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина д. 145.

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

ЗАО «Оптимедсервис», Россия.

453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,

ул. Воинов - интернационалистов д. 17.

Упаковка Гель в шприце

Состав.		
Компонент	Материалы	Содержание мг/мл
Гидроксипропилметилцеллюлоза	Etsu (Япония), кат. № 9004-65-03	20±0,3
Калий хлористый	ГОСТ 4234 «Merck»(Германия), кат.№ 104937	0,76 ±0,03
Кальций хлористый	ФСП 42-0006-5675-04 «Merck»(Германия), кат.№102382	0,48±0,02
Магний хлористый	ГОСТ 4209 «Merck»(Германия), кат.№105833	0,30±0,02
Натрий ацетат	ГОСТ 199 «Merck»(Германия), кат.№106267	3,90±0,05
Натрий цитрат	ГОСТ 22280 «Merck»(Германия), кат.№106488	1,70±0,03
Физиологический раствор 0,9% или Натрий хлористый	ФСП 42-1445-06 (Р N000772/01-090608) «Merck»(Германия), кат.№106404	0,71±0,5 4,9±0,5
Вода инъекционная до 1 мл	ФСП 42-0346-6825-05 (НД ЛП 002529-080714)	до 1,0 мл

Упаковка Гель в шприце

ГЕЛЬ «ОПТИМЕД» ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ЖИДКИХ СРЕД ГЛАЗА
в комплекте с канюлей глазной
по ту 32.50.13-004-29792921-2019

объем одного флакона: ☒ 3,0 мл ☐ 5,0 мл ☐ 10,0 мл



Упаковка Гель во флаконе

ГЕЛЬ «ОПТИМЕД» ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ЖИДКИХ СРЕД ГЛАЗА
в комплекте с канюлей глазной
по ту 32.50.13-004-29792921-2019

объем одного флакона: ☐ 3,0 мл ☒ 5,0 мл ☐ 10,0 мл

Упаковка Гель во флаконе

ГЕЛЬ «ОПТИМЕД» ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ЖИДКИХ СРЕД ГЛАЗА
в комплекте с канюлей глазной
по ту 32.50.13-004-29792921-2019

объем одного флакона: ☐ 3,0 мл ☐ 5,0 мл ☒ 10,0 мл

Упаковка Гель во флаконе

ГЕЛЬ «ОПТИМЕД»
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ЖИДКИХ СРЕД ГЛАЗА

в комплекте с канюлей глазной
по ТУ 32.50.13-004-29792921-2019

Одноразовый

СТЕРИЛЬНО

1 флакон содержит
гидроксипропилметилцеллюлозы 2%

3 мл ☐ 5 мл ☒ 10 мл ☐

Дата выпуска: 12 04 24

Годен до: 12 04 26

Партия №: 027F

Упаковка Гель во флаконе

Гель "Оптимед" для замещения жидких сред глаза
в комплекте с канюлей глазной
по ТУ 32.50.13-004-29792921-2019 в комплекте.

- Гель во флаконе 3, 5 или 10 мл с укупорочной пробкой и алюминиевыми колпачками - 10 шт.
- Канюли глазные однократного применения стерильные - 10 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.

STERILE



ТУ 32.50.13-004-29792921-2019
РУ №

Стерильность гарантирована при условии целостности упаковки и не повреждена! Только для однократного использования.
Недопустимость применения в случае нарушения целостности упаковки.
Условия хранения: при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.
Условия транспортирования: при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.

РАЗРАБОТЧИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО «Оптимедсервис», Россия.

453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина д. 145.

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ЗАО «Оптимедсервис», Россия.

453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Воинов - интернационалистов д. 17.

Упаковка Гель во флаконе

Гель «Оптимед» для замещения жидких сред глаза в комплекте с канюлей глазной по ТН 32.50.13-004-29792921-2019 - предназначен при проведении хирургических вмешательств на переднем отрезке глаза, поддерживает глубину передней камеры, защищает эндотелий роговицы и другие прилегающие структуры глаза, улучшает визуализацию.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

«Гель «Оптимед» применяется в лечебных учреждениях в качестве защитного агента и для поддержания глубины передней камеры при внутриглазных операциях в офтальмохирургии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

«Гель «Оптимед» вводится в переднюю камеру глаза с помощью канюли. Инъекцию можно проводить как до, так и после удаления хрусталика. В конце операции основная масса препарата вымывается из передней камеры глаза ирригационным раствором (не поставляется в комплекте). «Гель «Оптимед» наносится также на поверхность роговицы - оберегает ее от высыхания, предотвращает спущивание эпителия и улучшает визуальный контроль за ходом операции. Если во время хирургической манипуляции количество введенного ранее геля недостаточно, можно ввести дополнительный объем.

Упаковка Гель во флаконе

Состав:

Компонент	Материалы	Содержание мг/мл
Гидроксипропилметилцеллюлоза	Etsu (Япония), кат. № 9004-65-03	20±0,3
Калий хлористый	ГОСТ 4234 «Merck»(Германия), кат.№ 104937	0,76 ±0,03
Кальций хлористый	ФСП 42-0006-5675-04 «Merck»(Германия), кат.№102382	0,48±0,02
Магний хлористый	ГОСТ 4209 «Merck»(Германия), кат.№105833	0,30±0,02
Натрий ацетат	ГОСТ 199 «Merck»(Германия), кат.№106267	3,90±0,05
Натрий цитрат	ГОСТ 22280 «Merck»(Германия), кат.№106488	1,70±0,03
Физиологический раствор 0,9% или Натрий хлористый	ФСП 42-1445-06 (Р N000772/01-090608) «Merck»(Германия), кат.№106404	0,71±0,5 4,9±0,5
Вода инъекционная до 1 мл	ФСП 42-0346-6825-05 (НД ЛП 002529-080714)	до 1,0 мл

Упаковка Гель во флаконе



ПРОШНТО
Листов 31