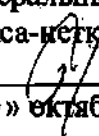


**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Генеральный директор  
ООО «Гекса-нетканые материалы»  
 А.Ф. Бунин  
«01» октября 2010 года

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

### **Маски медицинские из нетканых материалов стерильные и нестерильные «ГЕКСА»**

1. Назначение
2. Основные технические характеристики
3. Противопоказания к применению
4. Подготовка к работе, порядок работы изделия
5. Правила хранения

## **1 Назначение**

Маска медицинская на завязках и маска медицинская на резинке из нетканого материала, стерильная и нестерильная предназначена для индивидуальной защиты от инфекционных заражений через дыхательные пути, для медицинского персонала в лечебных учреждениях, в том числе при проведении хирургических операций.

Маска может быть использована в амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, для реализации в рознице, в качестве средства индивидуальной защиты.

## **2 Основные технические характеристики**

Маска представляет собой прямоугольную салфетку, изготовленную из нетканых материалов (неламинированный нетканый материал спанбонд из полипропилена типа S, SMS; мелтблаун), с фиксатором на переносице, снабжённые резинками или завязками, с окантовкой или без неё.

Маска может выпускаться двух типов: двухслойная или трёхслойная.

Маска упаковывается в пакет комбинированный под стерилизацию; нестерильные маски упаковываются в коробки.

Маски, предназначенные для стерилизации газовым способом, имеют герметичную индивидуальную упаковку, выполненную из пакета комбинированного.

Маски, предназначенные для стерилизации радиационным способом, имеют герметичную индивидуальную упаковку, выполненную из пакета комбинированного или из плёнки полиэтиленовой.

## **3 Противопоказания к применению**

Противопоказаний нет.

## **4 Подготовка к работе, порядок работы изделия**

Вскрыть упаковку с Масками и извлечь из неё содержимое. После извлечения содержимое упаковки использовать по назначению.

Маска предназначена только для одноразового использования — после использования Маска подвергается утилизации.

## **5 Правила хранения**

Хранение Масок у потребителя должно производиться в чистом и сухом месте при температуре от +15°C до +35°C и относительной влажности 25-65% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок годности Масок 3 года со дня стерилизации для стерильной продукции, и 4 года со дня изготовления для нестерильной продукции.

Прошнуровано и пронумеровано

3 ( три ) листа (-ов)

«    »    20\_\_ г.



/Бунин А.Ф./