


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ВОЛЛ»


«18» июня 2024 г. Юдин А.И.

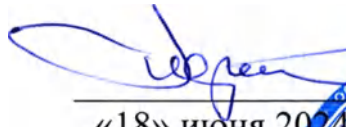

**ФОТОМАТЕРИАЛЫ
медицинского изделия**

«Респиратор медицинский одноразовый по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024»

производства ООО «ВОЛЛ», Россия

Фотографии



Фото 1. Респиратор медицинский одноразовый по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024
вариант исполнения: WALL 80 H NR D



Фото 2. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024
вариант исполнения: WALL 80 H NR D (передняя сторона)

респиратор медицинский
одноразовый
по ТУ 32.50.50-053.44234511-2024
вариант исполнения WALL 80 H NR D
Тип респиратора
Респиратор относится к
Тип II по ГОСТ Р 58396-2019
Регистрационное удостоверение:
№ РЗН хххх/ххххх
ООО «ВОЛЛ»
346885, Ростовская Область,
г.о. Город Батайск, г. Батайск,
ул. Энгельса, д. 57
Тел.: +7(863)207-55-75, contact@wall.com.ru

Прочтите инструкцию в месте приобретения/получения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПИРАТОРА

1. Эффективность бактериальной фильтрации респиратора 95 %.
2. Дифференциальное давление респиратора <29,4 Па/см².
3. Микробиологическая чистота респиратора 30 КОЕ/г.
4. Прочность крепления фиксирующей ленты к респиратору не менее 20 Н.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Респиратор предназначен в качестве барьерного средства для ограничения передачи инфекционных агентов, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия применения - в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, а также вне медицинских и лечебно-профилактических учреждениях. Область применения - профилактика инфекционных заболеваний.

Потенциальный потребитель: сотрудники в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, пациенты и другие лица для снижения риска распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура - от 10 до 35 °С
Относительная влажность - 80 % при 25 °С
Атмосферное давление - (84,0 - 106,7) кПа [(630-800) мм рт.ст.]

РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, ПЕРЧЕНЬ ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, ВОЗМОЖНЫХ ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Показания к применению: в качестве барьерного средства для обеспечения профилактических мероприятий, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Противопоказания: не выявлены в рамках установленного производителями назначения.

Побочные эффекты: возможна индивидуальная аллергическая реакция на материалы респиратора.

Риск применения медицинского изделия: класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н - 1.




ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕСПИРАТОРА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ УПАКОВКИ ТАКОЙ РЕСПИРАТОР
НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ УТИЛИЗИРОВАН.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕСПИРАТОРА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЕГО ЦЕЛОСТНОСТИ
РЕСПИРАТОР ПОДЛЕЖИТ УТИЛИЗАЦИИ В
СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕСПИРАТОРА БОЛЕЕ 8 ЧАСОВ
ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА
ЗАПРЕЩЕНО. ЛЮБАЯ ОБРАБОТКА
РЕСПИРАТОРА ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ РЕСПИРАТОРА

1. Проверьте упаковку на её целостность, после чего вскройте и извлеките респиратор.
2. Убедитесь в целостности респиратора.
3. Раскройте сложенный респиратор так, чтобы он принял форму чаши. Убедитесь в том, что панели полностью расправлены. Рисунок 1.
4. Зафиксируйте респиратор сначала на подбородке затем на верхней части лица. Рисунок 2.
5. Поместите верхнюю фиксирующую ленту на затылок, а нижнюю на шею так, что бы респиратор плотно прилегал к лицу. Фиксирующие ленты не должны быть перекручены и спутаны между собой. Рисунок 3.
6. При помощи обеих рук обожмите носовой зажим в соответствии с формой носа для обеспечения плотного прилегания и хорошего уплотнения. При обжимании носового зажима только одной рукой, может быть снижена фильтрующая эффективность респиратора. Рисунок 4.
7. Перед тем, как приступить к работе, необходимо убедиться в плотном прилегании респиратора к лицу.
8. Время использования НЕ БОЛЕЕ 8 ЧАСОВ.
9. Утилизируйте использованный респиратор в соответствии с Разделом 17 инструкции по применению.

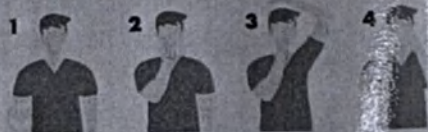


ХРАНЕНИЕ

1. Респиратор должен храниться в потребительской упаковке в условиях хранения 1 (от 5 до 40 °С для относительной влажности до 80 % при 25 °С) по ГОСТ 15150-19 не более 5 лет с даты изготовления.

2. В процессе хранения респиратор в потребительской упаковке не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей и других веществ, способных разрушить полимер и располагаться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, РАСШИФРОВКА ПИКТОГРАМ

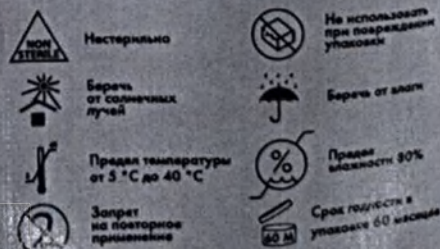

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ПАРТИИ: 05-07/2024
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ

Фото 3. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024 вариант исполнения: WALL 80 H NR D (задняя сторона)



Фото 4. Респиратор медицинский одноразовый по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024
вариант исполнения: WALL 80 HK NR D



Фото 5. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024 вариант исполнения: WALL 80 HK NR D (передняя сторона)

Респиратор медицинский
одноразовый
по ТУ 32.50.50-053.44234511-2024
вариант исполнения WALL 80 HK NR D
Тип респиратора
Респиратор относится к
Тип II по ГОСТ Р 58396-2019
Регистрационное удостоверение:
№ РЗН хххх/ххххх
ООО «ВОЛЛ»
346885, Ростовской Область,
г.о. Город Батайск, г. Батайск,
ул. Энгельса, д. 57
Тел.: +7(863)207-55-75, contact@wall.com.ru

Прочтите инструкцию в месте приобретения/получения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПИРАТОРА

1. Эффективность бактериальной фильтрации респиратора $\geq 95\%$.
2. Дифференциальное давление респиратора $< 29,4$ Па/см².
3. Микробиологическая чистота респиратора 30 КОЕ/г.
4. Прочность крепления фиксирующей ленты к респиратору не менее 20 Н.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Респиратор предназначен в качестве барьерного средства для ограничения передачи инфекционных агентов, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия применения - в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, а также вне учреждений и лечебно-профилактических учреждениях. Область применения - профилактика инфекционных заболеваний. Потенциальный потребитель: сотрудники в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, пациенты и другие лица для снижения риска распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура: от 10 до 35 °С
Относительная влажность: 80 % при 25 °С
Атмосферное давление: (84,0 - 106,7) кПа [(630-800) мм рт.ст.]

РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, ВОЗМОЖНЫХ ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Показания к применению: в качестве барьерного средства для обеспечения профилактических мероприятий, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Противопоказания: не выявлены в рамках установленного производителем назначения.

Побочные эффекты: возможна индивидуальная аллергическая реакция на материалы респиратора. Риски применения медицинского изделия: класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н - 1.



4 603 775 179 34 89




МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!	ЗАПРЕЩЕНО	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕСПИРАТОРА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ! ТАКОЙ РЕСПИРАТОР НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ УТИЛИЗИРОВАН.		
ВНИМАНИЕ!	ЗАПРЕЩЕНО	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕСПИРАТОРА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЕГО ЦЕЛОСТНОСТИ. ТАКОЙ РЕСПИРАТОР ПОДЛЕЖИТ УТИЛИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.		
ВНИМАНИЕ!	ЗАПРЕЩЕНО	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕСПИРАТОРА БОЛЕЕ 8 ЧАСОВ.		
ВНИМАНИЕ!	ЗАПРЕЩЕНО	ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА.		
ВНИМАНИЕ!	ЗАПРЕЩЕНО	ЛЮБАЯ ОБРАБОТКА
РЕСПИРАТОРА ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.		

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ РЕСПИРАТОРА

1. Проверьте упаковку на ее целостность, после чего вскройте и извлеките респиратор.
2. Убедитесь в целостности респиратора.
3. Раскройте сложенный респиратор так, чтобы он принял форму чаши. Убедитесь в том, что панели полностью расправлены. Рисунок 1.
4. Зафиксируйте респиратор сначала на подбородке затем на верхней части лица. Рисунок 2.
5. Поместите верхнюю фиксирующую ленту на затылке, а нижнюю на шее так, чтобы респиратор плотно прилегал к лицу. Фиксирующие ленты не должны быть перекручены и скрещены между собой. Рисунок 3.
6. При помощи обеих рук обожмите носовую зажим в соответствии с формой носа для обеспечения плотного прилегания и хорошего уплотнения. При обжимании носового зажима только одной рукой, может быть снижена фиксирующая эффективность респиратора. Рисунок 4.
7. Перед тем, как приступить к работе, необходимо убедиться, что респиратор плотно прилегает к лицу.
8. Время использования НЕ БОЛЕЕ 8 ЧАСОВ.
9. Утилизируйте использованный респиратор в соответствии с разделом 17 инструкции по применению.

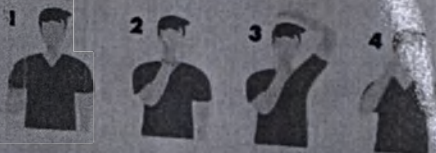


ХРАНЕНИЕ

1. Респиратор должен храниться в потребительской упаковке в условиях хранения 1 (от 5 до 40 °С при относительной влажности до 80 % при 25 °С) по ГОСТ 15150-69 не более 3 лет с даты изготовления.

2. В процессе хранения респиратор в потребительской упаковке не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, смазочных масел, бензина, керосина, щелочей, кислот и других веществ, способных разрушать материал и располагаться на расстоянии не менее 1 м от электрических приборов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, РАШИФРОВКА ПИКТОГРАММ

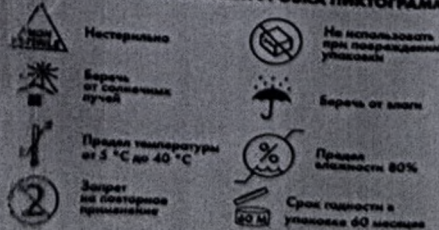

НОМЕР ПАРТИИ: 05-07/2024
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ

Фото 6. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024 вариант исполнения: WALL 80 HK NR D (задняя сторона)



Фото 7. Респиратор медицинский одноразовый по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024
вариант исполнения: WALL 80 CHK NR D



Фото 8. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024
вариант исполнения: WALL 80 CHK NR D (передняя сторона)

Респиратор медицинский
одноразовый
по ТУ 32.50.50-053.44234511-2024
вариант исполнения WALL 80 CHK NR D
Тип респиратора
Респиратор относится к
Тип II по ГОСТ Р 58396-2019
Регистрационное удостоверение:
№ РЗН XXXX/XXXX
ООО «ВОЛП»
346883, Ростовская Область,
с/о. Город Батайск, г. Батайск,
ул. Энгельса, д. 57
Тел.: +7(863)207-55-75, contact@wall.com.ru

Прочтите инструкцию в месте приобретения/получения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПИРАТОРА

1. Эффективность бактериальной фильтрации респиратора 295 %.
2. Дифференциальное давление респиратора <29,4 Па/см².
3. Микробиологическая чистота респиратора 30 КОЕ/г.
4. Прочность крепления фиксирующей ленты к респиратору не менее 20 Н.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Респиратор предназначен в качестве барьерного средства для ограничения передачи инфекционных агентов, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия применения - в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, а также вне медицинских и лечебно-профилактических учреждениях. Область применения - профилактика инфекционных заболеваний.

Потенциальный потребитель: сотрудники в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, пациенты и другие лица для снижения риска распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура - от 10 до 35 °C
Относительная влажность - 80 % при 25 °C
Атмосферное давление - (84,0 - 106,7) кПа [(630-800) мм рт. ст.].

РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, ВОЗМОЖНЫХ ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Показания к применению: в качестве барьерного средства для обеспечения профилактических мероприятий, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Противопоказания: не выявлены в рамках установленного производителем назначения.

Побочные эффекты: возможна индивидуальная аллергическая реакция на материалы респиратора. Риски применения медицинского изделия: класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н - 1.



ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ ТАКОГО РЕСПИРАТОРА ЛЕЖИТ НА УТИЛИЗАЦИИ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЕГО ЦЕЛОСТНОСТИ. РЕСПИРАТОР ПОДЛЕЖИТ УТИЛИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА БОЛЕЕ В ЧАСОВ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО
ОБРАБОТКА РЕСПИРАТОРА ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ РЕСПИРАТОРА

Откройте упаковку на её целостность, после чего вскройте затылок респиратора.
Вставьте в целостности респиратор так, чтобы он принял форму чашки. Убедитесь в том, что панели полностью сложены. Рисунок 1.
Фиксируйте респиратор сначала на подбородке затылка на затылочной части лица. Рисунок 2.
Застегните верхнюю фиксирующую ленту на затылке, а нижнюю на шее так, чтобы респиратор плотно прилегал к лицу. Фиксирующие ленты не должны быть перекручены и пересечены между собой. Рисунок 3.
С помощью обеих рук обожмите носовой зажим в соответствии с формой носа для обеспечения плотного прилегания и хорошего уплотнения. При обжимании носового зажима только одной рукой, может быть снижена фильтрующая эффективность респиратора. Рисунок 4.
После того, как приступите к работе, необходимо убедиться в плотном прилегании респиратора к лицу.
Время использования НЕ БОЛЕЕ В ЧАСОВ.
Утилизуйте использованный респиратор в соответствии с инструкцией по применению.



ХРАНЕНИЕ

Респиратор должен храниться в потребительской упаковке в сухом месте хранения 1 (от 5 до 40 °C при относительной влажности до 80 % при 25 °C) по ГОСТ 15150-69 не более 5 лет со дня изготовления.

В процессе хранения респиратор в потребительской упаковке не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, смазочных масел, бензина, керосина, щелочей и других веществ, способных разрушать пластик, и располагаться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, РАШИФРОВКА ПИКТОГРАММ

Нестерильно	Не использовать при повреждении упаковки
Береж от солнечных лучей	Береж от влаги
Пределы температуры от 5 °C до 40 °C	Предел влажности 80%
Запрет на повторное применение	Срок годности в упаковке 60 месяцев

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ПАРТИИ: 05-07/2024

МЕСТО ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАНО НА УПАКОВКЕ

Фото 9. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024 вариант исполнения: WALL 80 CHK NR D (задняя сторона)

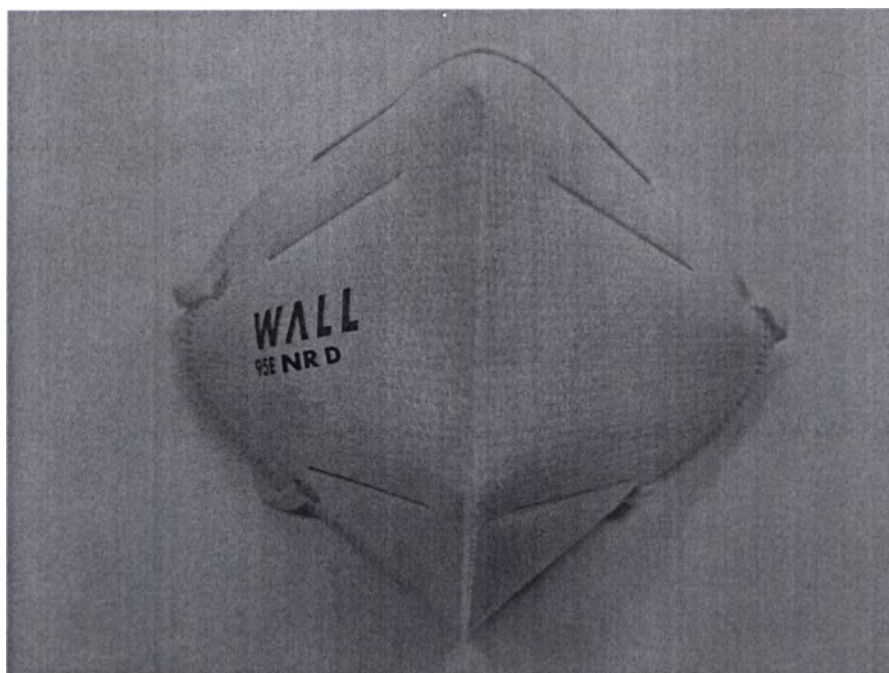


Фото 10. Респиратор медицинский одноразовый по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024
вариант исполнения: WALL 95 E NR D



Фото 11. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024
вариант исполнения: WALL 95 E NR D (передняя сторона)

Респиратор медицинский
одноразовый
по ТУ 32.50.50-053.44234511-2024
вариант исполнения WALL 95 E NR D
Тип респиратора
Респиратор относится к
Тип II по ГОСТ Р 58396-2019
Регистрационное удостоверение:
№ РЗН хххх/ххххх
ООО «ВОЛЛ»
346885, Ростовская Область,
с.о. Город Батайск, г. Батайск,
ул. Энгельса, д. 57
Тел.: +7(863)207-55-75, contact@wall.com.ru

Прочитайте инструкцию в месте приобретения/получения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПИРАТОРА

1. Эффективность бактериальной фильтрации респиратора 2,95 %
2. Дифференциальное давление респиратора <29,4 Па/см².
3. Микробиологическая чистота респиратора 30 КОЕ/г.
4. Прочность крепления фиксирующей ленты к респиратору не менее 20 Н.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Респиратор предназначен в качестве барьерного средства для ограничения передачи инфекционных агентов, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения - в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, а также вне медицинских и лечебно-профилактических учреждений.
Область применения - профилактика инфекционных заболеваний.

Потенциальный потребитель: сотрудники в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, пациенты и другие лица для снижения риска распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

ОБРУЧАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура - от 10 до 35 °С
Относительная влажность - 80 % при 25 °С
Атмосферное давление - (84,0 - 106,7) кПа [(630-800) мм рт.ст.]

РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, ПОРЧЕНЫ ПОКАЗАНИЯМИ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ, ВОЗМОЖНЫХ ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Показания к применению: в качестве барьерного средства для обеспечения профилактических мероприятий, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Противопоказания: не выявлены в рамках установленного назначения.

Побочные эффекты: возможна индивидуальная аллергическая реакция на материалы респиратора.

Риск применения медицинского изделия: класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н-ч.1.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСПИРАТОРА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ ТАКОГО РЕСПИРАТОРА ЗАПРЕЩЕНО.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЕГО ЦЕЛОСТНОСТИ ПОДЛЕЖИТ УТИЛИЗАЦИИ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА ПОДЛЕЖИТ УТИЛИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА БОЛЕЕ 8 ЧАСОВ ЗАПРЕЩЕНО.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА ПОСЛЕ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНО.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА ПОСЛЕ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНО.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА ПОСЛЕ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНО.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСПИРАТОРА


1. Проверьте упаковку на ее целостность, после чего вскрыть и извлечь респиратор.
2. Убедитесь в целостности респиратора.
3. Раскройте сложенный респиратор так, чтобы он принял форму чашки. Убедитесь в том, что панели полностью расправлены. Рисунок 1.
4. Зафиксируйте респиратор сначала на подбородке, затем на верхней части лица. Рисунок 2.
5. Для респираторов серии Wall 95 E (дополнение) наденьте фиксирующие ленты, находящиеся с обеих сторон, на уши. Убедитесь, что респиратор плотно прилегает к лицу.
6. При помощи обеих рук обожмите носовую зажимку в соответствии с формой носа для обеспечения плотного прилегания и хорошего уплотнения. При обжатии носовой зажимки только одной рукой, может быть снижена фильтрующая эффективность респиратора. Рисунок 4.
7. Перед тем, как приступить к работе, необходимо убедиться в плотном прилегании респиратора к лицу.
8. Время использования НЕ БОЛЕЕ 8 ЧАСОВ.
9. Утилизируйте использованный респиратор в соответствии с разделом 17 инструкции по применению.



ХРАНЕНИЕ

1. Респиратор должен храниться в потребительской упаковке в условиях хранения 1 (от 5 до 40 °С при относительной влажности до 80 % при 25 °С) по ГОСТ 15150-69 не более 5 лет с даты изготовления.
2. В процессе хранения респиратор в потребительской упаковке не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей и других веществ, способных разрушать полимер и располагаться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, РАШИФРОВКА ПИКТОГРАММ

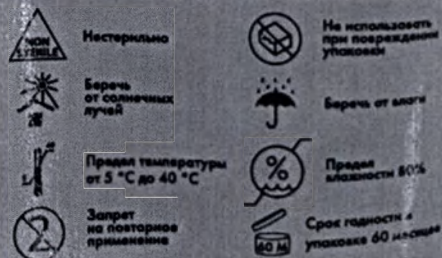

НОМЕР ПАРТИИ: 05-07/2024
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ

Фото 12. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024 вариант исполнения: WALL 95 E NR D (задняя сторона)



Фото 13. Респиратор медицинский одноразовый по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024
вариант исполнения: WALL 95 H NR D



Фото 14. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024
вариант исполнения: WALL 95 H NR D (передняя сторона)

Респиратор медицинский
одноразовый
по ТУ 32.50.50-053.44234511-2024
вариант исполнения WALL 95 H NR D
Тип респиратора
Респиратор относится к
Тип II по ГОСТ Р 58396-2019
Регистрационное удостоверение:
№ РЗН хххх/ххххх
ООО «ВОЛЛ»
346885, Ростовская Область,
г.о. Город Батайск, г. Батайск,
ул. Энгельса, д. 57
Тел.: +7(863)207-55-75, contact@wall.com.ru

Прочтите инструкцию в месте приобретения/получения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПИРАТОРА

1. Эффективность бактериальной фильтрации респиратора $\geq 95\%$.
2. Дифференциальное давление респиратора $< 29,4$ Па.
3. Микробиологическая чистота респиратора 30 КОЕ/г.
4. Прочность крепления фиксирующей ленты к респиратору ≥ 20 Н.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Респиратор предназначен в качестве барьерного средства для ограничения передачи инфекционных агентов, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения - в медицинских, лечебно-профилактических учреждениях, а также в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях. Область применения - профилактика инфекционных заболеваний.

Потенциальный потребитель: сотрудники в медицинских, лечебно-профилактических учреждениях, пациенты, другие лица для снижения риска распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура - от 10 до 35 °C
Относительная влажность - 80 % при 25 °C
Атмосферное давление - (84,0 - 106,7) кПа [(630-800) мм рт.ст.]

РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, ВОЗМОЖНЫХ ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Показания к применению: в качестве барьерного средства для обеспечения профилактических мероприятий, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Противопоказания: не выявлены в рамках установленных производителем назначения.

Побочные эффекты: возможна индивидуальная аллергическая реакция на материалы респиратора.

Риски применения медицинского изделия: класс безопасности от степени потенциального риска применения в медицинских целях в соответствии с номенклатурой классификатором медицинских изделий, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н - 1.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ ТАКОЙ РЕСПИРАТОР ПОДЛЕЖИТ УТИЛИЗАЦИИ.
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЕГО ЦЕЛОСТНОСТИ. ТАКОЙ РЕСПИРАТОР ПОДЛЕЖИТ УТИЛИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА БОЛЕЕ 8 ЧАСОВ.
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА.
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ЛЮБАЯ ОБРАБОТКА РЕСПИРАТОРА ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ РЕСПИРАТОРА

1. Проверьте упаковку на её целостность, после чего вскройте её и извлеките респиратор.
2. Убедитесь в целостности респиратора.
3. Раскройте сложенный респиратор так, чтобы он принял форму чаши. Убедитесь в том, что панели полностью расправлены. Рисунок 1.
4. Зафиксируйте респиратор сначала на подбородке затем на верхней части лица. Рисунок 2.
5. Поместите верхнюю фиксирующую ленту на затылке, а нижнюю на шею так, чтобы респиратор плотно прилегает к лицу. Фиксирующие ленты не должны быть перекручены и вступать между собой. Рисунок 3.
6. При помощи обеих рук обожмите носовую зажим в соответствии с формой носа для обеспечения плотного прилегания и хорошего уплотнения. При обжимании носового зажима только одной рукой, может быть снижена фильтрующая эффективность респиратора. Рисунок 4.
7. Перед тем, как приступить к работе, необходимо убедиться в плотном прилегании респиратора к лицу.
8. Время использования НЕ БОЛЕЕ 8 ЧАСОВ.
9. Утилизируйте использованный респиратор в соответствии с разделом 17 инструкции по применению.




ХРАНЕНИЕ

1. Респиратор должен храниться в потребительской упаковке в условиях хранения 1 (от 5 до 40 °C при относительной влажности до 80 % при 25 °C) по ГОСТ 15150-09 не более 5 лет с даты изготовления.

2. В процессе хранения респиратор в потребительской упаковке не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей и других веществ, способных разрушать материал, и располагаться на расстоянии не менее 1 м от агрессивных приборов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, РАШИФРОВКА ПИКТОГРАМ

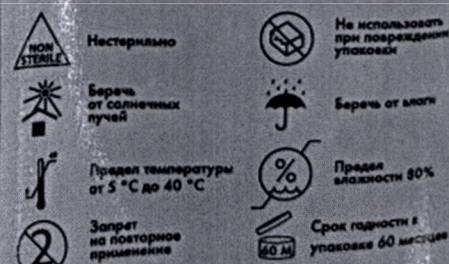

НОМЕР ПАРТИИ: 05-07/2024
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ

Фото 15. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024 вариант исполнения: WALL 95 H NR D (задняя сторона)



Фото 16. Респиратор медицинский одноразовый по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024
вариант исполнения: WALL 95 HK NR D



Фото 17. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024
вариант исполнения: WALL 95 HK NR D (передняя сторона)

Респиратор медицинский
одноразовый
по ТУ 32.50.50-053.44234511-2024
вариант исполнения WALL 95 HK NR D
Тип респиратора
Респиратор относится к
Тип II по ГОСТ Р 58396-2019
Регистрационное удостоверение:
№ РЗН хххх/ххххх
ООО «ВОЛЛ»
346885, Ростовская Область,
г.о. Город Батайск, г. Батайск,
ул. Энгельса, д. 57
Тел.: +7(863)207-55-75, contact@wall.com.ru

Иметь инструкцию в месте приобретения/получения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПИРАТОРА

- 1. Эффективность бактериальной фильтрации респиратора 95 %.
- 2. Дифференциальное давление респиратора <29,4 Па/см².
- 3. Микробиологическая чистота респиратора 30 КОЕ/г.
- 4. Прочность крепления фиксирующей ленты к респиратору не менее 20 Н.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Респиратор предназначен в качестве барьерного средства для ограничения передачи инфекционных агентов, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения - в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, а также вне учреждений и лечебно-профилактических учреждений.

Цель применения - профилактика инфекционных заболеваний.

Потребитель: сотрудник в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, пациенты и лица, для снижения риска распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура - от 10 до 35 °С
Относительная влажность - 80 % при 25 °С
Барометрическое давление - (84,0 - 106,7) кПа [(630-800) мм рт.ст.]

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, ОТНОСИТЕЛЬНО ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ, ВОЗМОЖНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ

Назначение к применению: в качестве барьерного средства для обеспечения профилактических мероприятий, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Противопоказания: не выявлены в рамках установленного функционального назначения.

Побочные эффекты: возможна индивидуальная аллергическая реакция на материалы респиратора.

Риск применения медицинского изделия: класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях в соответствии с нормативным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 41н - 1.




МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ ТАКОЙ РЕСПИРАТОР ПОДЛЕЖИТ УТИЛИЗАЦИИ.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЕГО ЦЕЛОСТНОСТИ ТАКОЙ РЕСПИРАТОР ПОДЛЕЖИТ УТИЛИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.


ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА БОЛЕЕ 8 ЧАСОВ.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА!

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ЛЮБАЯ ОБРАБОТКА РЕСПИРАТОРА ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ РЕСПИРАТОРА

1. Проверьте упаковку на её целостность, после чего вскройте и извлеките респиратор.
2. Убедитесь в целостности респиратора.
3. Раскройте сложенный респиратор так, чтобы он принял форму чашки. Убедитесь в том, что панели полностью расправлены. Рисунок 1.
4. Зафиксируйте респиратор сначала на подбородке затем на верхней части лица. Рисунок 2.
5. Поместите верхнюю фиксирующую ленту на затылок, а нижнюю на шею так, чтобы респиратор плотно прилегло к лицу. Фиксирующие ленты не должны быть перекручены и соприкасаться между собой. Рисунок 3.
6. При помощи обеих рук обожмите носовую зажимку в соответствии с формой носа для обеспечения плотного прилегания и хорошего уплотнения. При обжимании носовой зажимки только одной рукой, может быть снижена фильтрующая эффективность респиратора. Рисунок 4.
7. Перед тем, как приступить к работе, необходимо убедиться в плотном прилегании респиратора к лицу.
8. Время использования НЕ БОЛЕЕ 8 ЧАСОВ.
9. Утилизируйте использованный респиратор в соответствии с разделом 17 инструкции по применению.

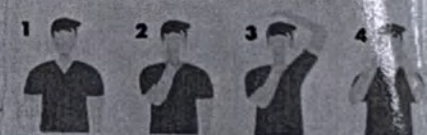

ХРАНЕНИЕ

1. Респиратор должен храниться в потребительской упаковке в условиях хранения 1 (от 5 до 40 °С при относительной влажности до 80 % при 25 °С) по ГОСТ 15150-69 не более 5 лет с даты изготовления.
2. В процессе хранения респиратор в потребительской упаковке не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, смазочных масел, бензина, керосина, мыла, щелочей и других веществ, способных разрушить полимер и расползаться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, РАССИФРОВКА ПИКТОГРАММ

	Стерильно		Не использовать при повреждении упаковки
	Береж от солнечных лучей		Береж от влаги
	Пределы температуры от 5 °С до 40 °С		Предел влажности 80%
	Запрет на повторное применение		Срок годности в упаковке 60 месяцев

НОМЕР ПАРТИИ: 08-07/2024
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ

Фото 18. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024 вариант исполнения: WALL 95 HK NR D (задняя сторона)



Фото 19. Респиратор медицинский одноразовый по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024
вариант исполнения: WALL 95 CHK NR D



Фото 20. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024
вариант исполнения: WALL 95 CHK NR D (передняя сторона)

Респиратор медицинский
одноразовый
по ТУ 32.50.50-053.44234511-2024
вариант исполнения WALL 95 CHK NR D
Тип респиратора
Респиратор относится к
Тип II по ГОСТ Р 58396-2019
Регистрационное удостоверение:
№ РЗН хххх/ххххх
ООО «ВОЛЛ»
346885, Ростовская Область,
г.о. Город Батайск, г Батайск,
ул. Энгельса, д. 57
Тел.: +7(863)207-55-75, contact@wall.com.ru

Прочтите инструкцию в месте приобретения/получения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПИРАТОРА

1. Эффективность бактериальной фильтрации респиратора $\geq 95\%$.
2. Дифференциальное давление респиратора $< 29,4 \text{ Па/см}^2$.
3. Микробиологическая чистота респиратора 30 КОЕ/г.
4. Прочность крепления фиксирующей ленты к респиратору не менее 20 Н.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Респиратор предназначен в качестве барьерного средства для ограничения передачи инфекционных агентов, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия применения - в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, а также вне медицинских и лечебно-профилактических учреждениях. Область применения - профилактика инфекционных заболеваний.

Потенциальный потребитель: сотрудник в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, пациенты и другие лица для снижения риска распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура - от 10 до 35°C .
Относительная влажность - 80% при 25°C .
Атмосферное давление - $[94,0 - 106,7] \text{ кПа}$ $[(630-800) \text{ мм рт.ст.}]$.

РИСКИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЛЕДСТВИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОСЛАВЛЯЕМЫХ ВОЗМОЖНЫМ ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

Показание к применению: в качестве барьерного средства для обеспечения профилактических мероприятий, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Противопоказания: не выявлены в рамках установленного производителем назначения.

Побочные эффекты: возможна индивидуальная

аллергическая реакция на материалы респиратора.

Риск применения медицинского изделия: класс в

зависимости от степени потенциального риска применения в

медицинских целях в соответствии с номенклатурным

классификатором медицинских изделий, утвержденным

приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н-1.



4 603775 793120



ВНИМАНИЕ: ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕСПИРАТОРА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ ТАКОГО РЕСПИРАТОРА
ПОДЛЕЖИТ УТИЛИЗАЦИИ.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕСПИРАТОРА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЕГО ЦЕЛОСТНОСТИ.
ТАКОГО РЕСПИРАТОР ПОДЛЕЖИТ УТИЛИЗАЦИИ В
СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕСПИРАТОРА БОЛЕЕ 8 ЧАСОВ.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ЛЮБАЯ ОБРАБОТКА
РЕСПИРАТОРА ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ РЕСПИРАТОРА

1. Сохраните упаковку на всё целостность, после чего вскрыйте её, извлеките респиратор.
2. Проверьте в целостности респиратора.
3. Раскройте сложенный респиратор так, чтобы он принял форму чаши. Убедитесь в том, что панели полностью разгладились. Рисунок 1.
4. Фиксируйте респиратор сначала на подбородке затем на нижней части лица. Рисунок 2.
5. Привяжите верхнюю фиксирующую ленту на затылке, внахлест на шею так, что бы респиратор плотно прилегал к лицу. Фиксирующие ленты не должны быть перекручены и скрещены между собой. Рисунок 3.
6. С помощью обеих рук обожмите носовую ленту в соответствии с формой носа для обеспечения плотного прилегания и хорошего уплотнения. При обжимании носовой ленты только одной рукой, может быть снижена фиксирующая эффективность респиратора. Рисунок 4.
7. Перед тем, как приступить к работе, необходимо убедиться в плотном прилегании респиратора к лицу.
8. Время использования НЕ БОЛЕЕ 8 ЧАСОВ.
9. Утилизируйте использованный респиратор в соответствии с Разделом 17 инструкции по применению.




ХРАНЕНИЕ

1. Респиратор должен храниться в потребительской упаковке в условиях хранения 1 (от 5 до 40°C при относительной влажности до 80% при 25°C) по ГОСТ 15150-69 не более 5 лет с даты изготовления.

2. В процессе хранения респиратор в потребительской упаковке не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, смазочных масел, бензина, керосина, ацетона, щелочей и других веществ, способных разрушить материал: располагаться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, РАШИФРОВКА ПИКТОГРАММ

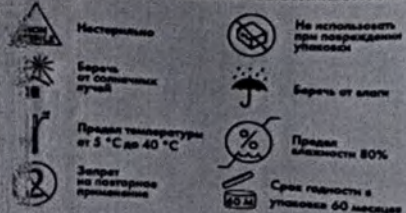

УЧЕТ ПАРТИИ: 05-07/2024
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ

Фото 21. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024 вариант исполнения: WALL 95 CHK NR D (задняя сторона)



Фото 22. Респиратор медицинский одноразовый по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024
вариант исполнения: WALL 99 H NR D



Фото 23. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024
вариант исполнения: WALL 99 H NR D (передняя сторона)

Респиратор медицинский
одноразовый
по ТУ 32.50.50-053.44234511-2024
вариант исполнения WALL 99 H NR D
Тип респиратора
Респиратор относится к
Тип II по ГОСТ Р 58396-2019
Регистрационное удостоверение:
№ РЗН хххх/ххххх
ООО «ВОЛЛ»
346885, Ростовская Область,
г.о. Город Батайск, г Батайск,
ул Энгельса, д. 57
Тел.: +7(863)207-55-75, contact@wall.com.ru

Прочтите инструкцию в месте приобретения/получения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПИРАТОРА

1. Эффективность бактериальной фильтрации респиратора $\geq 95\%$.
2. Дифференциальное давление респиратора $< 29,4 \text{ Па/см}^2$.
3. Микробиологическая чистота респиратора 30 КОЕ/г.
4. Прочность крепления фиксирующей ленты к респиратору не менее 20 Н.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Респиратор предназначен в качестве барьерного средства для ограничения передачи инфекционных агентов, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия применения - в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, а также вне медицинских и лечебно-профилактических учреждений.
Область применения - профилактика инфекционных заболеваний.
Потенциальный потребитель: сотрудники в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, пациенты и другие лица для снижения риска распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура - от 10 до 35 °C
Относительная влажность - 80 % при 25 °C
Атмосферное давление - (84,0 - 106,7) кПа [(630-800) мм рт. ст.]

РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, ВОЗМОЖНЫХ ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Показания к применению: в качестве барьерного средства для обеспечения профилактических мероприятий, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Противопоказания: не выявлены в рамках установленного производителем назначения.

Побочные эффекты: возможна индивидуальная аллергическая реакция на материалы респиратора.

Риски применения медицинского изделия: класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н - 1.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА ЗАПРЕЩЕНО В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ ТАКОЙ РЕСПИРАТОР НЕ МОЖЕТ УТИЛИЗИРОВАТЬСЯ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА ЗАПРЕЩЕНО В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЕГО ЦЕЛОСТНОСТИ.
РЕСПИРАТОР ПОДЛЕЖИТ УТИЛИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА ЗАПРЕЩЕНО БОЛЕЕ 8 ЧАСОВ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА ЗАПРЕЩЕНО ПОВТОРНОЕ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА ЗАПРЕЩЕНО ЛЮБАЯ ОБРАБОТКА РЕСПИРАТОРА ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ РЕСПИРАТОРА

Откройте упаковку на её целостность, после чего вскройте респиратор.
Извлеките респиратор из упаковки.
Сложите сложенный респиратор так, чтобы он принял форму лица. Убедитесь в том, что панели полностью сложены. Рисунок 1.
Сложите респиратор сначала на подбородке затем на лбу. Рисунок 2.
Сложите верхнюю фиксирующую ленту на затылке, а нижнюю на шее так, чтобы респиратор плотно прилегал к лицу. Фиксирующие ленты не должны быть перекручены и перекрутки между собой. Рисунок 3.
С помощью обеих рук обожмите носовой зажим в соответствии с формой носа для обеспечения плотного прилегания и хорошего уплотнения. При обжимании носового зажима только одной рукой, может быть снижена эффективность респиратора. Рисунок 4.
После того, как приступите к работе, необходимо убедиться, что респиратор прилегает к лицу.
Срок использования НЕ БОЛЕЕ 8 ЧАСОВ.
Используйте использованный респиратор в соответствии с инструкцией по применению.

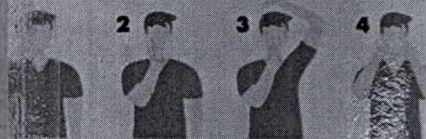

ХРАНЕНИЕ

Респиратор должен храниться в потребительской упаковке в течение хранения 1 (от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 80 % при 25 °C) по ГОСТ 15150-67 не более 5 лет со дня изготовления.

В процессе хранения респиратор в потребительской упаковке не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, смазочных масел, бензина, керосина, лакокрасочных и других веществ, способных разрушать материал, располагаться на расстоянии не менее 1 м от электромагнитных приборов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ

Нестерильно		Не использовать при повреждении упаковки
Бережь от солнечных лучей		Бережь от влаги
Предел температур от 5 °C до 40 °C		Предел влажности 80%
Запрет на повторное применение		Срок годности в упаковке 60 месяцев

ПАРТИИ: 05-07/2024
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ

Фото 24. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024 вариант исполнения: WALL 99 H NR D (задняя сторона)



Фото 25. Респиратор медицинский одноразовый по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024
вариант исполнения: WALL 99 HK NR D


WALL

**РЕСПИРАТОР
МЕДИЦИНСКИЙ**

одноразовый

по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024

вариант исполнения: WALL 99 HK NR D

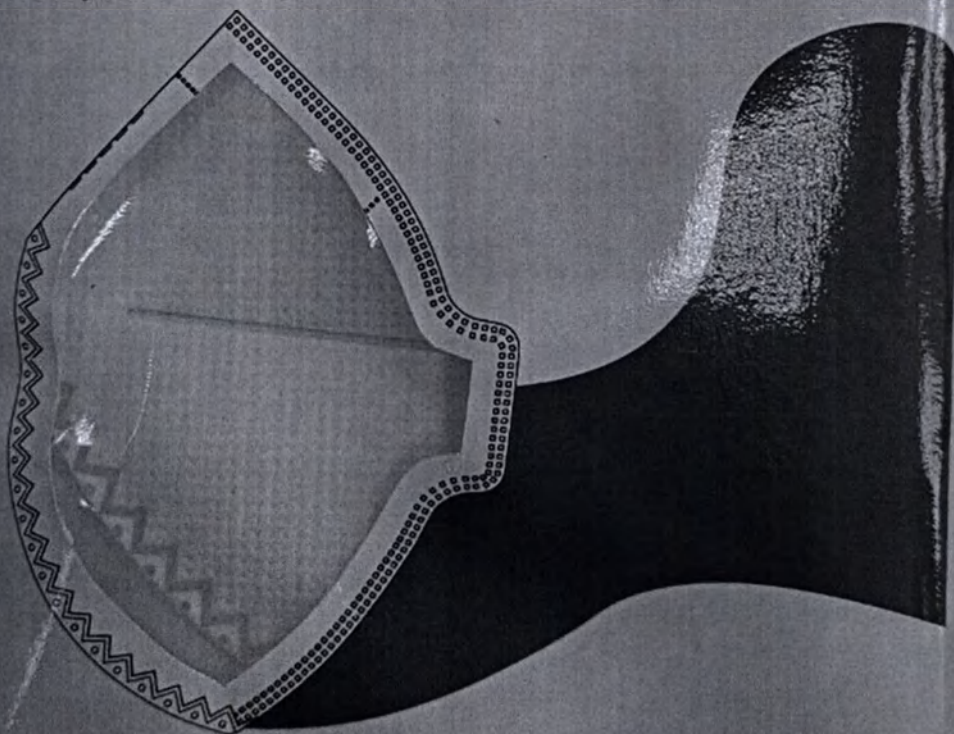

WALL.COM.RU

1 шт.

Фото 26. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024
вариант исполнения: WALL 99 HK NR D (передняя сторона)



Фото 28. Респиратор медицинский одноразовый по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024
вариант исполнения: WALL 99 CHK NR D

WALL


**угольный
фильтр**

РЕСПИРАТОР МЕДИЦИНСКИЙ

одноразовый

по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024

вариант исполнения: WALL 99 CHK NR D

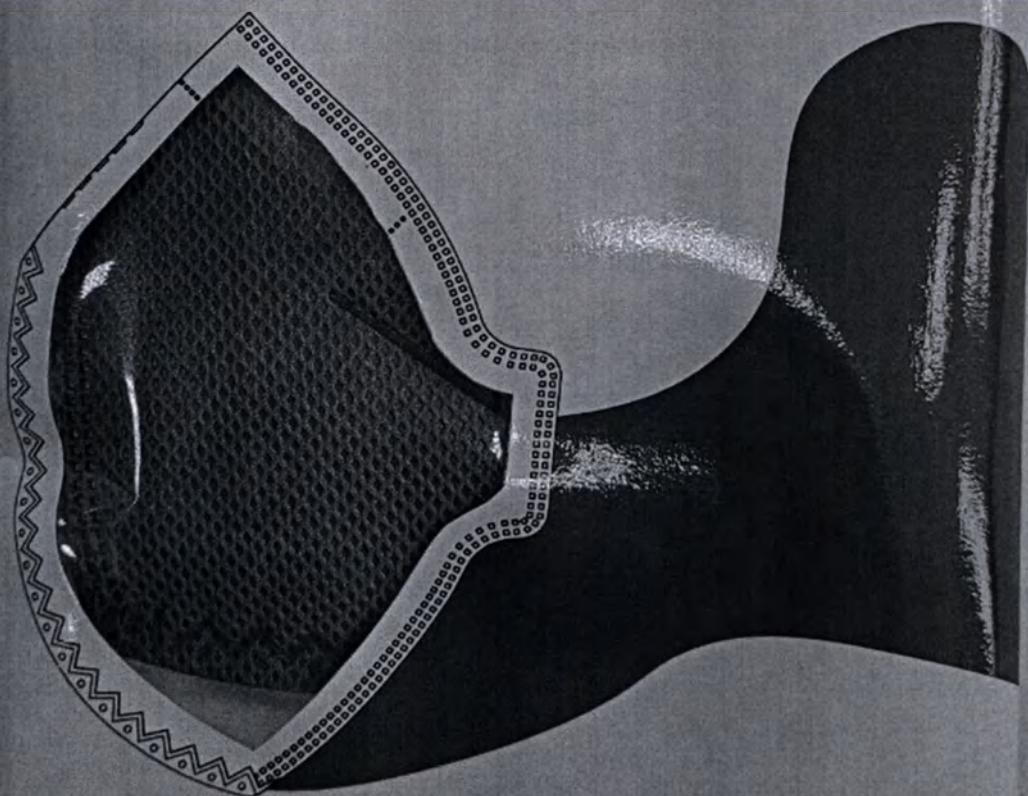

WALL.COM.RU

1 шт.

Фото 29. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024
вариант исполнения: WALL 99 CHK NR D (передняя сторона)

Респиратор медицинский
одноразовый
по ТУ 32.50.50-053.44234511-2024
вариант исполнения WALL 99 CHK NR D
Тип респиратора
Респиратор относится к
Тип II по ГОСТ Р 58396-2019
Регистрационное удостоверение:
№ РЗН АЖЖ/АЖЖЖ
ООО «ВОЛЛ»
346685, Ростовская Область,
г.о. Город Батайск, г. Батайск,
ул. Энгельса, д. 57
Тел.: +7(863)207-55-75, contact@wall.com.ru

Прочтите инструкцию до момента приобретения/получения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПИРАТОРА

1. Эффективность бактериальной фильтрации респиратора $\geq 95\%$.
2. Дифференциальное давление респиратора $< 29,4 \text{ Па/см}^2$.
3. Микробиологическая чистота респиратора 30 КОЕ/г.
4. Прочность крепления фиксирующей ленты к респиратору не менее 20 Н.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Респиратор предназначен в качестве барьерного средства для ограничения передачи инфекционных агентов, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия применения - в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, а также вне медицинских и лечебно-профилактических учреждениях. Область применения - профилактика инфекционных заболеваний. Потенциальный потребитель: сотрудники в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, пациенты и другие лица для снижения риска распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура - от 10 до 35 °C
Относительная влажность - 80 % при 25 °C
Атмосферное давление - (84,0 - 106,7) кПа [(630-800) мм рт.ст.].

РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, ВОЗМОЖНЫХ ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Показания к применению: в качестве барьерного средства для обеспечения профилактических мероприятий, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Противопоказания: не выявлены в рамках установленного производителем назначения. Побочные эффекты: возможна индивидуальная аллергическая реакция на материалы респиратора. Риски применения медицинского изделия: класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н - 1.



4 603775 793137




ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ ТАКОГО РЕСПИРАТОРА ЛЕЖИ УТИЛИЗАЦИИ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЕГО ЦЕЛОСТНОСТИ. ЭТОЙ РЕСПИРАТОР ПОДЛЕЖИТ УТИЛИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА БОЛЕЕ 8 ЧАСОВ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО
ОБРАБОТКА РЕСПИРАТОРА ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ РЕСПИРАТОРА

Проверьте упаковку на её целостность, после чего вскройте упаковку и извлеките респиратор.
Проверьте в целостности респиратора.
Соберите сложенный респиратор так, чтобы он принял форму чашки. Убедитесь в том, что панели полностью выровнены. Рисунок 1.
Фиксируйте респиратор сначала на подбородке затылочной части лица. Рисунок 2.
Затем зафиксируйте верхнюю фиксирующую ленту на затылке, а нижнюю на шее так, чтобы респиратор плотно прилегал к лицу. Фиксирующие ленты не должны быть перекручены и перекрещены между собой. Рисунок 3.
С помощью обеих рук обожмите носовую зажимку в соответствии с формой носа для обеспечения плотного прилегания и хорошего уплотнения. При обжимании носового зажима только одной рукой, может быть снижена эффективность респиратора. Рисунок 4.
После того, как приступите к работе, необходимо убедиться в хорошем прилегании респиратора к лицу.
Время использования НЕ БОЛЕЕ 8 ЧАСОВ.
Используйте использованный респиратор в соответствии с пунктом 17 инструкции по применению.

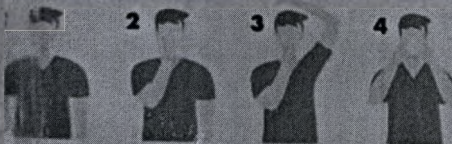

ХРАНЕНИЕ

Респиратор должен храниться в потребительской упаковке в сухом месте при температуре хранения 1 (от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 80 % при 25 °C) по ГОСТ 15150-07 не более 5 лет со дня изготовления.

В процессе хранения респиратор в потребительской упаковке не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, смазочных масел, бензина, керосина, щелочей и других веществ, способных разрушать пластик и располагаться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, РАШИФРОВКА ПИКТОГРАММ

Нестерильно		Не использовать при повреждении упаковки
Береж от солнечных лучей		Береж от влаги
Предел температуры от 5 °C до 40 °C		Предел влажности 80%
Запрет на повторное применение		Срок годности в упаковке 60 месяцев

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ПАРТИЯ: 05-07/2024

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАН НА УПАКОВКЕ

Фото 30. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024 вариант исполнения: WALL 99 CHK NR D (задняя сторона)

Номер партии: 16-06/2024	Респиратор медицинский одноразовый
Дата изготовления: 06.2024	по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024
Срок хранения: не менее 5 лет	
Количество: 1 шт.	вариант исполнения:
СТЕРИЛЬНО	WALL 99 HK NR D
Для одноразового применения	
Изготовитель: ООО «ВОЛ»	
Юридический адрес:	
346885, Ростовская обл., г.о. город Батайск, г. Батайск, ул. Энгельса, д. 57	
Хранить при температуре от -50°С до 40°С, максимальная влажность 80%	
Тел.: (863)207-55-75, contact@wall.com.ru	
Регистрационное удостоверение:	
№ РЗН xxxx/xxxxx	

WALL

Фото 31. Групповая упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-053-44234511-2024 вариант исполнения: WALL 99 HK NR D

Прошито и пронумеровано 32 листов

18 июня 2024 г.

Генеральный директор

Юдин А.И.

М.П.

