

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Эвидент плюс»

В. В. Смыслов



Макеты маркировки медицинского изделия

«Материалы полимерные базисные для изготовления зубных протезов

**«ЭВИДСАН», «ЭВИДСАН ЛАЙТ», «ЭВИДСАН ДЕНТ», «ЭВИДСАН УЛЬТРА»
(«EVIDSUN», «EVIDSUN LIGHT», «EVIDSUN DENT», «EVIDSUN ULTRA»)**

по ТУ 9391-005-75254505-2007

MM 005

1. МАРКИРОВКА МАТЕРИАЛОВ, УПАКОВАННЫХ В ПАКЕТЫ

1.1 Материал полимерный базисный «ЭВИДСАН» («EVIDSUN») (индивидуальная упаковка - пакет с замком ДОК ПАЙ массой 100 г)

ЭВИДСАН

EVIDSUN

Материал полимерный
базисный для изготовления
зубных протезов

Base polymer for denture molding

100 g

EVIDSUN

RU: Применяется при малой потере зубов и включённых дефектах. Описание: модуль упругости подобран таким образом, что материал оптимален для концевых и включенных дефектов. Выпускается в 7 вариантах цвета. Материал безопасен при применении по назначению. **Перед применением ознакомиться с инструкцией!**

EN: It is used for small loss of teeth and included defects. Description: the modulus of elasticity is selected in such a way that the material is optimal for end defects. Available in 7 color options. The material is safe when used for its intended purpose. **Before using, read the instructions!**

маркировка цвета 

Таблица параметров литья для разных аппаратов/ Molding settings table for various equipment

Оборудование Equipment	Температура нагрева, °C Temperature heating	Длительность нагрева, мин Duration, min	Длительность охлаждения под давлением, мин Duration cooling under pressure, min	Давление, Атм Pressure, Atm
Thermal press TPS-II	285	11 – 12	3	8 – 9
Thermal press TPS-IIM	287	11 – 12	3	4,5
Unipress	275	11 – 12	3	6 – 7
Evov V-8	265 – 270	11 – 12	3	5 – 6
Quattro Ti	265	12	3	6
J-100 Evolution	270 – 275	11 – 12	3	5
Thermopress 1.0 (Averon)	285	11 – 12	3	4 – 6
Projet-100 (Yamahachi)	277 – 279	11 – 12	3	9

Срок годности 2 года.

Срок годности после вскрытия не более 3 месяцев.

Хранить в сухом, защищённом от света месте, при температуре от 5 °C до 25 °C

Предприятие-изготовитель: ООО «Эвидент плюс»

Дата выпуска

Россия, 141142, Московская область, г.Лосино-Петровский,

Номер партии

п. Биокомбината, д.16, пом.6

8 (495) 500-73-46

sale@evidsun.com

Штриховой код*

8 (496) 255-68-68

evidsun.com info@evidsun.com

Знак соответствия*

Р/У

ТУ 9391-005-75254505-2007

*(При наличии)

ЭВИДСАН

EVIDSUN

Материал полимерный
базисный для изготовления
зубных протезов

Base polymer for denture molding

250 g

EVIDSUN

RU: Применяется при малой потере зубов и включённых дефектах. Описание: модуль упругости подобран таким образом, что материал оптимален для концевых и включённых дефектов. Выпускается в 7 вариантах цвета. Материал безопасен при применении по назначению. **Перед применением ознакомиться с инструкцией!**

EN: It is used for small loss of teeth and included defects. Description: the modulus of elasticity is selected in such a way that the material is optimal for end defects. Available in 7 color options. The material is safe when used for its intended purpose. **Before using, read the instructions!**

маркировка цвета ○

Таблица параметров литья для разных аппаратов/ Molding settings table for various equipment

Оборудование Equipment	Температура нагрева, °C Temperature heating	Длительность нагрева, мин Duration, min	Длительность охлаждения под давлением, мин Duration cooling under pressure, min	Давление, Атм Pressure, Atm
Thermal press TPS-II	285	11 – 12	3	8 – 9
Thermal press TPS-IIIM	287	11 – 12	3	4,5
Unipress	275	11 – 12	3	6 – 7
Evov V-8	265 – 270	11 – 12	3	5 – 6
Quattro Ti	265	12	3	6
J-100 Evolution	270 – 275	11 – 12	3	5
Thermopress 1.0 (Averon)	285	11 – 12	3	4 – 6
Projet-100 (Yamahachi)	277 – 279	11 – 12	3	9

Срок годности 2 года.

Срок годности после вскрытия не более 3 месяцев.

Хранить в сухом, защищённом от света месте, при температуре от 5 °C до 25 °C

Предприятие-изготовитель: ООО «Эвидент плюс»

Дата выпуска

Россия, 141142, Московская область, г.Лосино-Петровский,

Номер партии

п. Биокомбината, д. 16, пом. 6

8 (495) 500-73-46

sale@evidsun.com

Штриховой код*

8 (496) 255-68-68

evidsun.com

info@evidsun.com

Знак соответствия*

Р/У

ТУ 9391-005-75254505-2007

*(При наличии)

ЭВИДСАН ДЕНТ EVIDSUN DENT

Материал полимерный
базисный для изготовления
зубных протезов

Base polymer for denture molding

100 g

EVIDSUN DENT

RU: Подходит для полных протезов, сочетает сверхмалую усадку и высокую жёсткость. Высокая поверхностная твёрдость материала способствует хорошей полируемости протеза. Выпускается в 3 вариантах цвета. Материал безопасен при применении по назначению. **Перед применением ознакомиться с инструкцией!**

EN: Suitable for complete dentures, it combines ultra-low shrinkage and high rigidity. The high surfacehardness of the material contributes to the good polishability of the prosthesis. Available in 3 color options. The material is safe when used for its intended purpose. **Before using, read the instructions!**

маркировка цвета 

Таблица параметров литья для разных аппаратов/ Molding settings table for various equipment

Оборудование Equipment	Температура нагрева, °C Temperature heating	Длительность нагрева, мин Duration, min	Длительность охлаждения под давлением, мин Duration cooling under pressure, min	Давление, Атм Pressure, Atm
Thermal press TPS-II	287	11-12	3	8 – 9
Thermal press TPS-IIM	287	11-12	3	4,5
Unipress	277	11-12	3	6 – 7
Evox V-8	267-270	11-12	3	5 – 6
Quattro Ti	267	12	3	6
J-100 Evolution	272-277	11-12	3	5
Thermopress 1.0 (Averon)	287	11-12	3	4 – 6
Projet-100 (Yamahachi)	279-281	11-12	3	9

Срок годности 2 года.

Срок годности после вскрытия не более 3 месяцев.

Хранить в сухом, защищённом от света месте, при температуре от 5 °C до 25 °C

Предприятие-изготовитель: ООО «Эвидент плюс»

Россия, 141142, Московская область, г.Лосино-Петровский,
п. Биокомбината, д.16, пом.6

8 (495) 500-73-46

sale@evidsun.com

Дата выпуска

Номер партии

8 (496) 255-68-68

evidsun.com info@evidsun.com

Штриховой код*

Знак соответствия*

Р/У

ТУ 9391-005-75254505-2007

*(При наличии)

ЭВИДСАН ДЕНТ EVIDSUN DENT

Материал полимерный
базисный для изготовления
зубных протезов

Base polymer for denture molding

250 g

EVIDSUN DENT

RU: Подходит для полных протезов, сочетает сверхмалую усадку и высокую жёсткость. Высокая поверхностная твёрдость материала способствует хорошей полируемости протеза. Выпускается в 3 вариантах цвета. Материал безопасен при применении по назначению. **Перед применением ознакомиться с инструкцией!**

EN: Suitable for complete dentures, it combines ultra-low shrinkage and high rigidity. The high surfacehardness of the material contributes to the good polishability of the prosthesis. Available in 3 color options. The material is safe when used for its intended purpose. **Before using, read the instructions!**

маркировка цвета ○

Таблица параметров литья для разных аппаратов/ Molding settings table for various equipment

Оборудование Equipment	Температура нагрева, °C Temperature heating	Длительность нагрева, мин Duration, min	Длительность охлаждения под давлением, мин Duration cooling under pressure, min	Давление, Атм Pressure, Atm
Thermal press TPS-II	287	11-12	3	8 – 9
Thermal press TPS-IIM	287	11-12	3	4,5
Unipress	277	11-12	3	6 – 7
Evax V-8	267-270	11-12	3	5 – 6
Quattro Ti	267	12	3	6
J-100 Evolution	272-277	11-12	3	5
Thermopress 1.0 (Averon)	287	11-12	3	4 – 6
Projet-100 (Yamahachi)	279-281	11-12	3	9

Срок годности 2 года.

Срок годности после вскрытия не более 3 месяцев.

Хранить в сухом, защищённом от света месте, при температуре от 5 °C до 25 °C

Предприятие-изготовитель: ООО «Эвидент плюс»

Россия, 141142, Московская область, г.Лосино-Петровский,
п. Биокombината, д.16, пом.6

8 (495) 500-73-46

8 (496) 255-68-68

Р/У

*(При наличии)

sale@evidsun.com
evidsun.com info@evidsun.com

ТУ 9391-005-75254505-2007

Дата выпуска
Номер партии

Штриховой код*
Знак соответствия*

ЭВИДСАН ЛАЙТ EVIDSUN LIGHT

Материал полимерный
базисный для изготовления
зубных протезов

Base polymer for denture molding

100 g

EVIDSUN LIGHT

RU: Универсальный материал на основе полиамида. Физико-химические характеристики сбалансированы. Материал применяется как для полных, так и для частичных протезов. Выпускается в 10 вариантах цвета. Материал безопасен при применении по назначению. **Перед применением ознакомиться с инструкцией!**

EN: Universal material based on polyamide. The physical and chemical characteristics are balanced. The material is used for both full and partial dentures. Available in 10 color options. The material is safe when used for its intended purpose. **Before using, read the instructions!**

маркировка цвета ○

Таблица параметров литья для разных аппаратов/ Molding settings table for various equipment

Оборудование Equipment	Температура нагрева, °C Temperature heating	Длительность нагрева, мин Duration, min	Длительность охлаждения под давлением, мин Duration cooling under pressure, min	Давление, Атм Pressure, Atm
Thermal press TPS-II	287	18	3	8 – 9
Thermal press TPS-IIM	287	18	3	4,5
Unipress	280	18	3	6 – 7
Evov V-8	275	18	3	5 – 6
Quattro Ti	270	18	3	6
J-100 Evolution	275	18	3	5
Thermopress 1.0 (Averon)	287	18	3	4 – 6
Projet-100 (Yamahachi)	280	18	3	9

Срок годности 2 года.

Срок годности после вскрытия не более 3 месяцев.

Хранить в сухом, защищённом от света месте, при температуре от 5 °C до 25 °C

Предприятие-изготовитель: ООО «Эвидент плюс»

Россия, 141142, Московская область, г.Лосино-Петровский,
п. Биокомбината, д.16, пом.6

8 (495) 500-73-46

evidsun.com

sale@evidsun.com

8 (496) 255-68-68

info@evidsun.com

Р/У

ТУ 9391-005-75254505-2007

*(При наличии)

Дата выпуска
Номер партии

Штриховой код*
Знак соответствия*

ЭВИДСАН ЛАЙТ EVIDSUN LIGHT

Материал полимерный
базисный для изготовления
зубных протезов

Base polymer for denture molding

250 g

EVIDSUN LIGHT

RU: Универсальный материал на основе полиамида. Физико-химические характеристики сбалансированы. Материал применяется как для полных, так и для частичных протезов. Выпускается в 10 вариантах цвета. Материал безопасен при применении по назначению. **Перед применением ознакомиться с инструкцией!**

EN: Universal material based on polyamide. The physical and chemical characteristics are balanced. The material is used for both full and partial dentures. Available in 10 color options. The material is safe when used for its intended purpose. **Before using, read the instructions!**

маркировка цвета ○

Таблица параметров литья для разных аппаратов/ Molding settings table for various equipment

Оборудование Equipment	Температура нагрева, °C Temperature heating	Длительность нагрева, мин Duration, min	Длительность охлаждения под давлением, мин Duration cooling under pressure, min	Давление, Атм Pressure, Atm
Thermal press TPS-II	287	18	3	8 – 9
Thermal press TPS-IIM	287	18	3	4,5
Unipress	280	18	3	6 – 7
Evox V-8	275	18	3	5 – 6
Quattro Ti	270	18	3	6
J-100 Evolution	275	18	3	5
Thermopress 1.0 (Averon)	287	18	3	4 – 6
Projet-100 (Yamahachi)	280	18	3	9

Срок годности 2 года.

Срок годности после вскрытия не более 3 месяцев.

Хранить в сухом, защищённом от света месте, при температуре от 5 °C до 25 °C

Предприятие-изготовитель: ООО «Эвидент плюс»

Россия, 141142, Московская область, г.Лосино-Петровский,
п. Биокомбината, д.16, пом.6

8 (495) 500-73-46

sale@evidsun.com
evidsun.com info@evidsun.com

8 (496) 255-68-68

Р/У

ТУ 9391-005-75254505-2007

*(При наличии)

Дата выпуска
Номер партии

Штриховой код*
Знак соответствия*

1.7 Материал полимерный базисный «ЭВИДСАН УЛЬТРА» («EVIDSUN ULTRA») (индивидуальная упаковка - пакет с замком ДОК ПАЙ массой 100 г)

ЭВИДСАН УЛЬТРА EVIDSUN ULTRA

Материал полимерный
базисный для изготовления
зубных протезов

Base polymer for denture molding

100 g

EVIDSUN ULTRA

RU: Полипропилен для изготовления зубных протезов. Применяется при малой потере зубов и включённых дефектах. Обладает высокой эластичностью и текучестью, прост в полировке и обработке. Выпускается в 5 вариантах цвета. Материал безопасен при применении по назначению. **Перед применением ознакомиться с инструкцией!**

EN: Polypropylene designed for the manufacture of removable prostheses. It has high elasticity. The material is easy to Polish and process. Available in 5 color options. EVIDSUN ULTRA is delivered in a gas-tight film package. **Before using, read the instructions!**

маркировка цвета ○

Таблица параметров литья материала EVIHARD для разных аппаратов

Оборудование Equipment	Температура нагрева, °C Temperature heating	Длительность нагрева, мин Duration, min	Длительность охлаждения под давлением, мин Duration cooling under pressure, min	Давление Атм, Pressure, Atm
Thermal press TPS-II	200	15	5	8
Thermal press TPS-IIIM	200	15	5	4
Unipress	200	15	5	6
Evov V-8	195	15	5	6
Quattro Ti	190	15	5	6
J-100 Evolution	200	15	5	5
Thermopress 1.0 (Averon)	200	15	5	4
Projet-100 (Yamahachi)	200 – 210	15	5	9

Срок годности 2 года.

Срок годности после вскрытия не более 3 месяцев.

Хранить в сухом, защищённом от света месте, при температуре от 5 °C до 25 °C

Предприятие-изготовитель: ООО «Эвидент плюс»

Россия, 141142, Московская область, г.Лосино-Петровский,
п. Биокомбината, д. 16, пом. 6

8 (495) 500-73-46

sale@evidsun.com

8 (496) 255-68-68

info@evidsun.com

Р/У

ТУ 9391-005-75254505-2007

*(При наличии)

Дата выпуска

Номер партии

Штриховой код*

Знак соответствия*

1.8 Материал полимерный базисный «ЭВИДСАН УЛЬТРА» («EVIDSUN ULTRA») (индивидуальная упаковка - пакет с замком ДОК ПАЙ массой 250 г)

ЭВИДСАН УЛЬТРА EVIDSUN ULTRA

Материал полимерный
базисный для изготовления
зубных протезов

Base polymer for denture molding

250 g

EVIDSUN ULTRA

RU: Полипропилен для изготовления зубных протезов. Применяется при малой потере зубов и включённых дефектах. Обладает высокой эластичностью и текучестью, прост в полировке и обработке. Выпускается в 5 вариантах цвета. Материал безопасен при применении по назначению. **Перед применением ознакомиться с инструкцией!**

EN: Polypropylene designed for the manufacture of removable prostheses. It has high elasticity. The material is easy to Polish and process. Available in 5 color options. EVIDSUN ULTRA is delivered in a gas-tight film package. **Before using, read the instructions!**

маркировка цвета ○

Таблица параметров литья материала EVIDSUN для разных аппаратов

Оборудование Equipment	Температура нагрева, Temperature heating	Длительность нагрева	Длительность охлаждения под давлением	Давление
Thermal press TPS-II	200 °C	15 min	5 min	8 atm
Thermal press TPS-IIM	200 °C	15 min	5 min	4 atm
Unipress	200 °C	15 min	5 min	6 atm
Evox V-8	195 °C	15 min	5 min	6 atm
Quattro Ti	190 °C	15 min	5 min	6 atm
J-100 Evolution	200 °C	15 min	5 min	5 atm
Thermopress 1.0 (Averon)	200 °C	15 min	5 min	4 atm
Projet-100 (Yamahachi)	200 – 210 °C	15 min	5 min	9 atm

Срок годности 2 года.

Срок годности после вскрытия не более 3 месяцев.

Хранить в сухом, защищённом от света месте, при температуре от 5 °C до 25 °C

Предприятие-изготовитель: ООО «Эвидент плюс»

Россия, 141142, Московская область, г.Лосино-Петровский,
п. Биокомбината, д.16, пом.6

8 (495) 500-73-46

sale@evidsun.com

Дата выпуска
Номер партии

8 (496) 255-68-68

evidsun.com

info@evidsun.com

Штриховой код*
Знак соответствия*

Р/У

ТУ 9391-005-75254505-2007

*(При наличии)

2. МАРКИРОВКА МАТЕРИАЛОВ В КАРТРИДЖАХ

2.1 Материал полимерный базисный «ЭВИДСАН» («EVIDSUN»)

Материал полимерный базисный для изготовления зубных протезов			
sale@evidsun.com	«ЭВИДСАН»	evidsun.com	
info@evidsun.com	«EVIDSUN»		
Применяется при малой потере зубов и включенных дефектах.			
Описание: модуль упругости подобран таким образом, что материал оптимален для концевых и включенных дефектов.			
Выпускается в 7 вариантах цвета.		☐ Обозначение цвета	
Материал безопасен при применении по назначению.			
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5 °С до 25 °С.			
Срок годности после вскрытия не более 3 месяцев.			
Перед применением ознакомиться с инструкцией!			
Предприятие-изготовитель: ООО «Эвидент плюс»			
Россия, 141142, Московская область, г. Лосино-Петровский			
п. Биокombината, д.16, помещ.6			
Телефон:	8 (495) 500-73-46	☐ 30 г	Срок годности 2 года.
	8 (496) 255-68-68	☐ 20 г	ТУ 9391-005-75254505-2007
		☐ 12 г	Р/У
Дата выпуска		Штриховой код*	Знак соответствия*
Номер партии			
*(При наличии)			

2.2 Материал полимерный базисный «ЭВИДСАН ЛАЙТ» («EVIDSUN LIGHT»)

Материал полимерный базисный для изготовления зубных протезов			
sale@evidsun.com	«ЭВИДСАН ЛАЙТ»	evidsun.com	
info@evidsun.com	«EVIDSUN LIGHT»		
Предназначен для полных и частичных съёмных протезов.			
Описание: модуль упругости подобран таким образом, что материал оптимален для концевых и включенных дефектов.			
Выпускается в 10 вариантах цвета.		☐ Обозначение цвета	
Материал безопасен при применении по назначению.			
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5 °С до 25 °С.			
Срок годности после вскрытия не более 3 месяцев.			
Перед применением ознакомиться с инструкцией!			
Предприятие-изготовитель: ООО «Эвидент плюс»			
Россия, 141142, Московская область, г. Лосино-Петровский,			
п. Биокombината, д.16, помещ.6			
Телефон:	8 (495) 500-73-46	☐ 30 г	Срок годности 2 года.
	8 (496) 255-68-68	☐ 20 г	ТУ 9391-005-75254505-2007
		☐ 12 г	Р/У
Дата выпуска		Штриховой код*	Знак соответствия*
Номер партии			
*(При наличии)			

2.3 Материал полимерный базисный «ЭВИДСАН ДЕНТ» («EVIDSUN DENT»)

Материал полимерный базисный для изготовления зубных протезов

sale@evidsun.com «ЭВИДСАН ДЕНТ» evidsun.com
info@evidsun.com «EVIDSUN DENT»

Предназначен для полноресъемных зубных протезов, а также при замещении концевых дефектов зубного ряда.

Описание: модуль упругости подобран таким образом, что материал оптимален для концевых и включенных дефектов.

Выпускается в 3 вариантах цвета. ☐ Обозначение цвета

Материал безопасен при применении по назначению.

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5 °С до 25 °С.

Срок годности после вскрытия не более 3 месяцев.

Перед применением ознакомиться с инструкцией!

Предприятие-изготовитель: ООО «Эвидент плюс»

Россия, 141142, Московская область, г. Лосино-Петровский,
п. Биокombината, д.16, помещ.6

Телефон: 8 (495) 500-73-46 ☐ 30 г Срок годности 2 года.
8 (496) 255-68-68 ☐ 20 г ТУ 9391-005-75254505-2007
☐ 12 г Р/У

Дата выпуска Штриховой код* Знак
Номер партии соответствия*

*(При наличии)

2.4 Материал полимерный базисный «ЭВИДСАН УЛЬТРА» («EVIDSUN ULTRA»)

Материал полимерный базисный для изготовления зубных протезов

sale@evidsun.com «ЭВИДСАН УЛЬТРА» evidsun.com
info@evidsun.com «EVIDSUN ULTRA»

Применяется при малой потере зубов и включенных дефектах.

Описание: полипропилен для изготовления зубных протезов. Обладает высокой эластичностью. Прост в полировке и обработке. Обладает высокой текучестью расплава.

Выпускается в 5 вариантах цвета. ☐ Обозначение цвета

Материал безопасен при применении по назначению.

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5 °С до 25 °С.

Срок годности после вскрытия не более 3 месяцев.

Перед применением ознакомиться с инструкцией!

Предприятие-изготовитель: ООО «Эвидент плюс»

Россия, 141142, Московская область, г. Лосино-Петровский,
п. Биокombината, д.16, помещ.6

Телефон: 8 (495) 500-73-46 ☐ 30 г Срок годности 2 года.
8 (496) 255-68-68 ☐ 20 г ТУ 9391-005-75254505-2007
☐ 12 г Р/У

Дата выпуска Штриховой код* Знак
Номер партии соответствия*

*(При наличии)

Примечание:

* - наносится при наличии

Прошито, пронумеровано и

скреплено печатью 11 листов

Генеральный директор

ООО «Эвидент плюс»

[Handwritten signature]



В. В. Смыслов

«Эвидент плюс»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор

ООО «Эвидент плюс»

В. В. Смыслов

« 27 »

августа

2024 г.



**Фотографические изображения внешнего вида
медицинского изделия**

**«Материалы полимерные базисные для изготовления зубных протезов
«ЭВИДСАН», «ЭВИДСАН ЛАЙТ», «ЭВИДСАН ДЕНТ»,
«ЭВИДСАН УЛЬТРА» («EVIDSUN», «EVIDSUN LIGHT»,
«EVIDSUN DENT», «EVIDSUN ULTRA»),
выпускаемые по ТУ 9391-005-75254505-2007**

Производитель: ООО «Эвидент плюс»

**Местоположение: 141142, Московская область, г.Лосино-Петровский,
п.Биокомбината, д.16 помещ.6**

**Место производства: 141142, Московская область, г.Лосино-Петровский,
п.Биокомбината, д.16 помещ.6**



«Материал полимерный базисный «ЭВИДСАН» («EVIDSUN») (индивидуальная упаковка массой 100 г)



EVIDSUN

ВНИМАНИЕ: Применяется при малой потере зубов и включённых дефектах. Описание: модуль упругости подобран таким образом, что материал оптимален для концевых и включённых дефектов. Выпускается в 7 вариантах цвета. Материал безопасен при применении по назначению. **Перед применением ознакомьтесь с инструкцией!**

NOTE: It is used for small loss of teeth and included defects. Description: the modulus of elasticity is selected in such a way that the material is optimal for end defects. Available in 7 color options. The material is safe when used for its intended purpose. **Before using, read the instructions!**

маркировка цвета 2

Таблица параметров литья для разных аппаратов/ Molding settings table for various equipment

Оборудование Equipment	Температура нагрева, °C Temperature heating	Длительность нагрева, мин Duration, min	Длительность охлаждения под давлением, мин Duration cooling under pressure, min	Давление, МПа Pressure, MPa
Thermal press TPS-II	285	11 – 12	3	1-3
Thermal press TPS-III	287	11 – 12	3	4-5
Unipress	275	11 – 12	3	6-7
Evex V-8	265 – 270	11 – 12	3	5-6
Quattro Ti	265	12	3	6
3-100 Evolution	270 – 275	11 – 12	3	5
Thermopress 1.0 (Averon)	285	11 – 12	3	4-6
Projet-100 (Yamahachi)	277 – 279	11 – 12	3	9

Срок годности 2 года.
Срок годности после вскрытия не более 3 месяцев.
Хранить в сухом, защищённом от света месте, при температуре от 5 °C до 25 °C.
Производитель-изготовитель: ООО «Эвидент плюс»
Россия, 141142, Московская область, г. Лосино-Петровский,
д. Лосино-Петровское, д. 16, пом. 6
Тел: (495) 500-73-46
Факс: (495) 255-68-68
evidsun.com sale@evidsun.com
info@evidsun.com
ТУ 9391-005-75254505-2007

Дата выпуска 04.03.2024
Номер партии 020

«Материал полимерный базисный «ЭВИДСАН» («EVIDSUN») (индивидуальная упаковка массой 250 г)

Материал полимерный базисный для изготовления зубных протезов
 sale@evidsun.com «ЭВИДСАН» evidsun.com
 info@evidsun.com «EVIDSUN»
 Применяется при малой потере зубов и включённых дефектах.
 Описание: модуль упругости подобран таким образом, что материал оптимален для концевых и включённых дефектов.
 Выпускается в 7 вариантах цвета. Обозначение цвета 3
 Материал безопасен при применении по назначению.
 Хранить в сухом, защищённом от света месте, при температуре от 5 °С до 25 °С.
 Срок годности после вскрытия не более 3 месяцев.
Перед применением ознакомиться с инструкцией!
 Предприятие-изготовитель: ООО «Эвидент плюс»
 Россия, 141142, Московская область, г. Лосино-Петровский
 п. Биокombината, д.16, помещ.6
 Телефон: 8 (495) 500-73-46 ☒ 30 г Срок годности 2 года.
 8 (496) 255-68-68 ☐ 20 г ТУ 9391-005-75254505-2007
 Дата выпуска 04.03.2024 ☐ 12 г Р/У
 Номер партии 010



Картридж с материалом «ЭВИДСАН» («EVIDSUN»)



«Материал полимерный базисный «ЭВИДСАН ДЕНТ» («EVIDSUN DENT») (индивидуальная упаковка массой 100 г)



EVIDSUN DENT

ВН: Подходит для полных протезов, сочетает сверхмалую усадку и высокую жесткость. Высокая поверхность твердость материала способствует хорошей полируемости протеза. Выпускается в 3 вариантах цвета. Материал безопасен при применении по назначению. *Перед применением ознакомиться с инструкцией!*

ВН: Suitable for complete dentures, it combines ultra-low shrinkage and high rigidity. The high surface hardness of the material contributes to the good polishability of the prosthesis. Available in 3 color variants. Material is safe when used for its intended purpose. *Before using, read the instructions!*

маркировка цвета 1

Таблица параметров литья для разных аппаратов / Molding settings table for various equipment

Оборудование Equipment	Температура нагрева, °C Temperature heating	Длительность нагрева, мин Duration, min	Длительность охлаждения под давлением, мин Duration cooling under pressure, min	Давление, Атм Pressure, Atm
Thermal press TPS-II	287	11-12	3	6-9
Thermal press TPS-III	287	11-12	3	4,5
Unipress	277	11-12	3	6-7
Exor V-8	267-270	11-12	3	5-6
Quattro Ti	267	12	3	6
1300 Evolution	272-277	11-12	3	5
Thermopress 1.0 (Averon)	287	11-12	3	4-6
Thermopress 100 (Yamahachi)	279-281	11-12	3	9

Срок хранения 2 года.
Срок годности после вскрытия не более 3 месяцев.
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5 °C до 25 °C.
Производитель-изготовитель: ООО «Эвидент плюс»
141742, Московская область, г.Лосино-Петровский,
Лесная, д.16, пом.6
Тел: 8(495) 134-73-40
Факс: 8(495) 255-68-68
evidsun.com sale@evidsun.com
info@evidsun.com
ТУ 9391-005-75254505-2007

Дата выпуска 04.03.2018
Номер партии 012

«Материал полимерный базисный «ЭВИДСАН ДЕНТ» («EVIDSUN DENT») (индивидуальная упаковка массой 250 г)

Материал полимерный базисный для изготовления зубных протезов
 szle@evidsun.com «ЭВИДСАН ДЕНТ» eidsun.com
 info@evidsun.com «EVIDSUN DENT»
 Предназначен для полноресъемных зубных протезов, а также при замещении
 концевых дефектов зубного ряда.
 Описание: модуль упругости подобран таким образом, что материал оптимален
 для концевых и включенных дефектов.
 Выпускается в 3 вариантах цвета. Обозначение цвета 1
 Материал безопасен при применении по назначению.
 Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5 °C до 25 °C.
 Срок годности после вскрытия не более 3 месяцев.
 Перед применением ознакомиться с инструкцией!
 Предприятие-изготовитель: ООО «Эвидент Плюс»
 Россия, 141142, Московская область, г. Лосино-Петровский,
 п. Биокорбината, д.16, помещ.6
 Телефон: 8 (495) 500-73-46 ☒ 30 г Срок годности 2 года.
 8 (496) 255-68-68 ☐ 20 г ТУ 9391-005-75254505-2007
 Дата выпуска 04.03.2024 ☐ 12 г Р/У
 Номер партии 012

Картридж с материалом «ЭВИДСАН ДЕНТ» («EVIDSUN DENT»)





«Материал полимерный базисный «ЭВИДСАН ЛАЙТ» («EVIDSUN LIGHT») (индивидуальная упаковка массой 100 г)



«Материал полимерный базисный «ЭВИДСАН ЛАЙТ» («EVIDSUN LIGHT») (индивидуальная упаковка массой 250 г)



Картридж с материалом «ЭВИДСАН ЛАЙТ» («EVIDSUN LIGHT»)

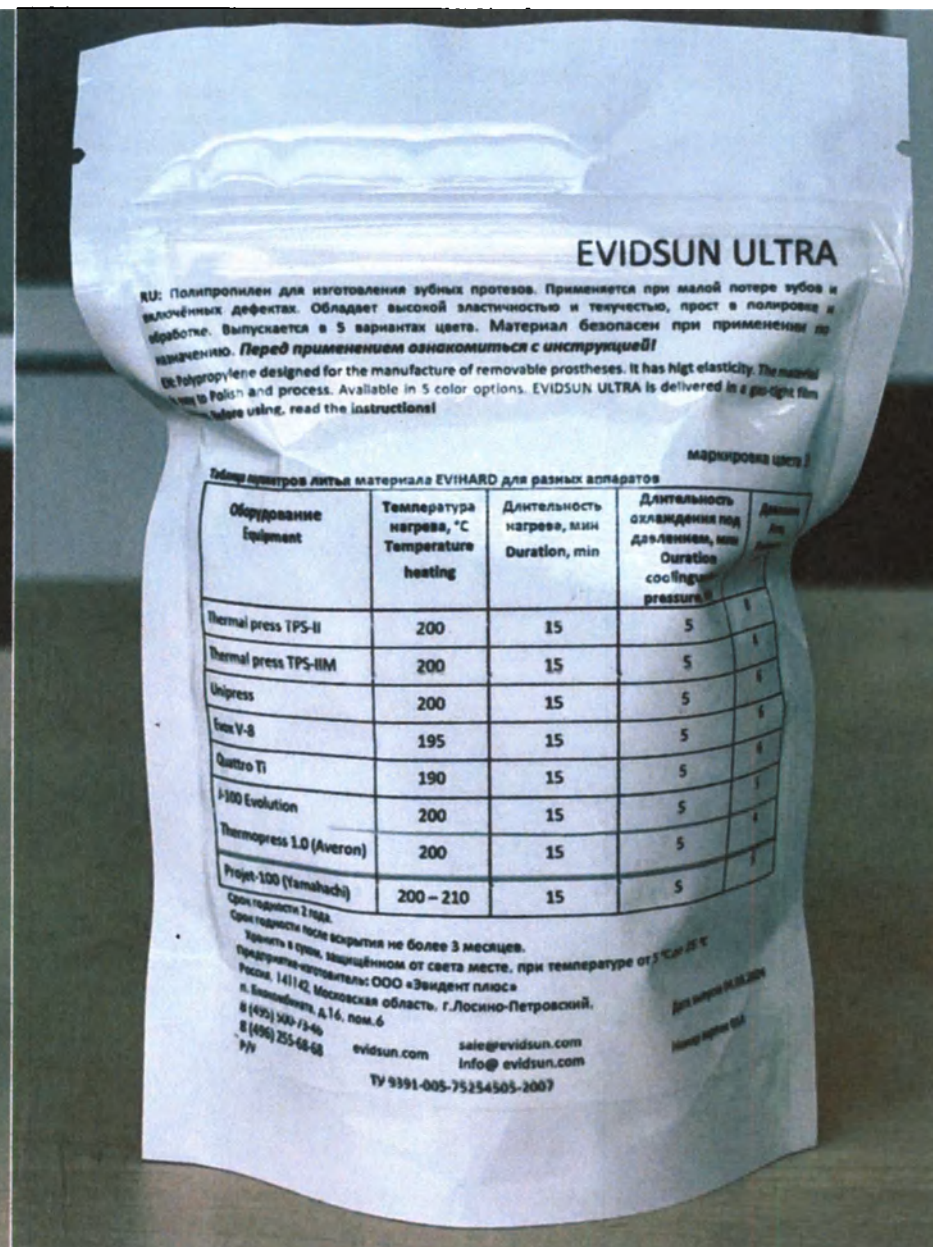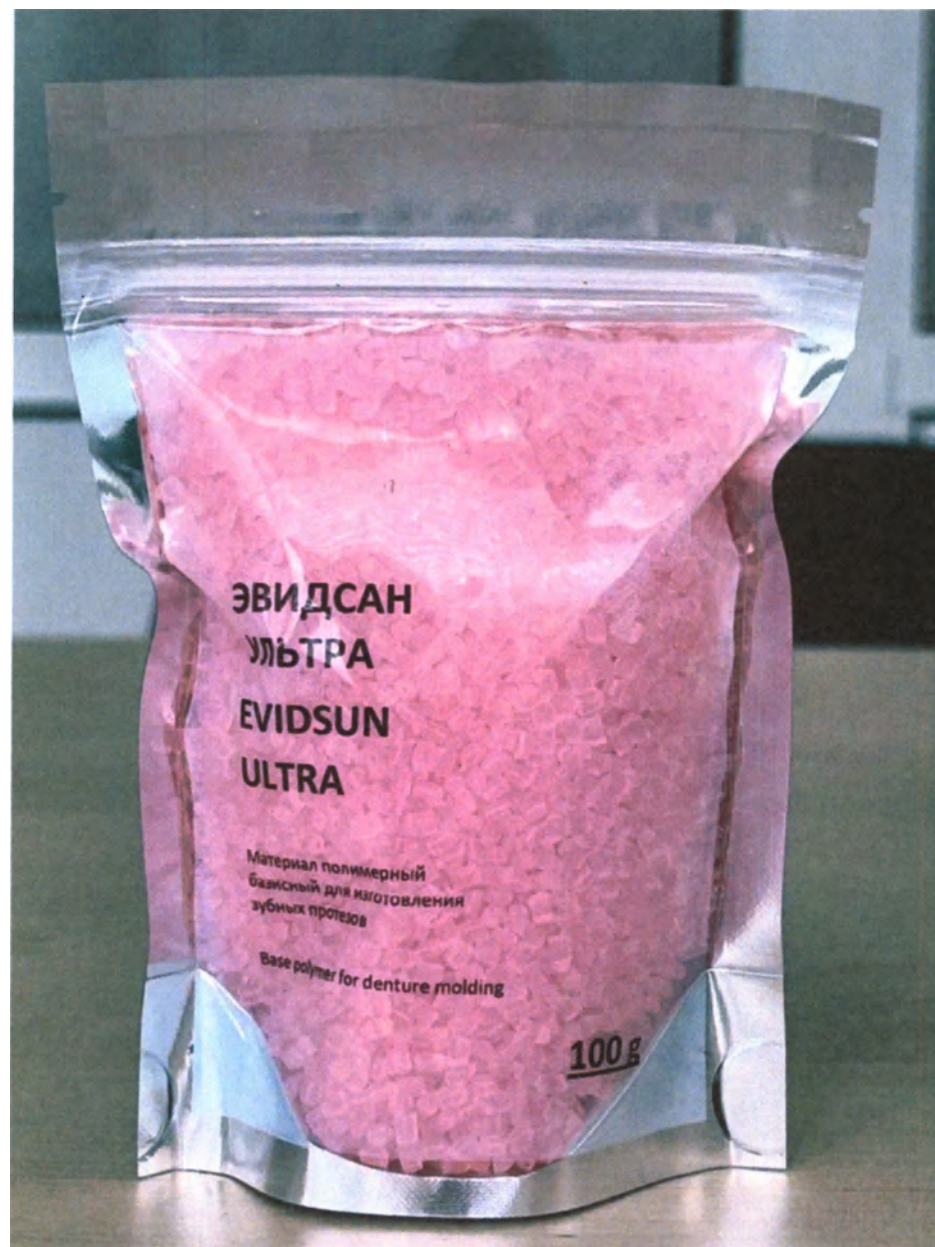

«Материал полимерный базисный «ЭВИДСАН УЛЬТРА» («EVIDSUN ULTRA») (индивидуальная упаковка массой 100 г)

EVIDSUN ULTRA

RU: Полимер для изготовления зубных протезов. Применяется при малой потере зубов и включённых зубах. Обладает высокой эластичностью и текучестью, прост в полировке и обработке. Выпускается в 5 вариантах цвета. Материал безопасен при применении по назначению. **Перед применением ознакомиться с инструкцией!**

EN: Polypropylene designed for the manufacture of removable prostheses. It has high elasticity. The material is easy to Polish and process. Available in 5 color options. EVIDSUN ULTRA is delivered in a gas-tight film package. Before using, read the instructions!

ЭВИДСАН
УЛЬТРА
EVIDSUN
ULTRA

Материал полимерный
базисный для изготовления
зубных протезов

Base polymer for denture molding

250 g

маркировка шп /

Таблица параметров литья материала EVIDHARD для разных аппаратов

Оборудование Equipment	Температура нагрева, Temperature heating	Длительность нагрева	Длительность охлаждения под давлением	
Thermal press TPS-II	200 °C	15 min	5 min	8 atm
Thermal press TPS-IIM	200 °C	15 min	5 min	4 atm
Unipress				6 atm
Exite V-8	200 °C	15 min	5 min	6 atm
Quattro Ti	195 °C	15 min	5 min	6 atm
I-100 Evolution	190 °C	15 min	5 min	5 atm
Thermopress 1.0 (Averon)	200 °C	15 min	5 min	4 atm
Amalg-100 (Yamahachi)	200 – 210 °C	15 min	5 min	2 atm

Срок годности 2 года.

Хранить в сухом, защищённом от света месте, при температуре от 5 °C до 25 °C.

Производитель-изготовитель: ООО «Эвидент плюс»

г. Москва, д. 16, пом. 6

Тел: 8 (495) 200-73-46

Факс: 8 (495) 255-68-68

evidsun.com

sale@evidsun.com

info@evidsun.com

ТУ 9391-005-75254505-2007

Дата выпуска 04.01.2008

Номер партии 004

«Материал полимерный базисный «ЭВИДСАН УЛЬТРА» («EVIDSUN ULTRA») (индивидуальная упаковка массой 250 г)

Материал полимерный базисный для изготовления зубных протезов
 sale@evidsun.com «ЭВИДСАН УЛЬТРА» evidsun.com
 info@evidsun.com «EVIDSUN ULTRA»
 Применяется при малой потере зубов и включённых дефектах.
 Описание: полипропилен для изготовления зубных протезов. Обладает высокой эластичностью. Прост в полировке и обработке. Обладает высокой текучестью расплава.
 Выпускается в 5 вариантах цвета. Обозначение цвета 3
 Материал безопасен при применении по назначению.
 Хранить в сухом, защищённом от света месте, при температуре от 5 °С до 25 °С.
 Срок годности после вскрытия не более 3 месяцев.
Перед применением ознакомиться с инструкцией!
 Предприятие-изготовитель: ООО «Эвидент плюс»
 Россия, 141142, Московская область, г. Лосино-Петровский,
 п. Биокомбината, д.16, помещ.6
 Телефон: 8 (495) 500-73-46 ☒ 30 г Срок годности 2 года.
 8 (496) 255-68-68 ☐ 20 г ТУ 9391-005-75254505-2007
 Дата выпуска 04.03.2024 ☐ 12 г Р/У
 Номер партии 014

Картридж с материалом «ЭВИДСАН УЛЬТРА» («EVIDSUN ULTRA»)

КОПИЯ ВЕРНА

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 13 листов.

Подлинный документ находится в

ООО «Эвидент плюс»

Генеральный директор

В. В. Смыслов

05.06.2017

