

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЗАВОД АЭРОЛАЙФ»



Першин А. А.,

август 2022 г.

**Технический паспорт — руководство по эксплуатации
на медицинское изделие**

**Обеззараживатели-очистители фотокаталитические воздуха
Аэролайф КФУ2-150 по ТУ 32.50.50-002-44999832-2022**

2022 г.

Оглавление

1. Наименование медицинского изделия	3
2. Сведения о производителе медицинского изделия	16
3. Место производства	16
4. Классификация	16
5. Назначение	16
6. Область применения	17
7. Потенциальные потребители медицинского изделия	17
8. Показания к применению, противопоказания и возможные побочные эффекты	17
9. Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства или материалов животного или человеческого происхождения.	17
10. Вид контакта с организмом	18
11. Описание медицинского изделия	18
12. Описание основных функциональных элементов медицинского изделия	19
13. Щит управления автоматике и сигнализации	21
14. Принцип действия	22
15. Основные классы уничтожаемых загрязнителей	23
16. Технические характеристики медицинского изделия	23
17. Размещение МИ	62
18. Требования по технике безопасности при работе с изделием	62
19. Управление работой	63
20. Комплект поставки	63
21. Маркировка медицинского изделия	76
22. Упаковка медицинского изделия	78
23. Перечень национальных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие	78
24. Техническое обслуживание	79
25. Очистка и дезинфекция	80
26. Информация о стерилизации	80
27. Перечень основных характеристик по эксплуатации, условиям хранения и транспортированию	80
28. Требования к охране окружающей среды	81
29. Порядок осуществления утилизации	81
30. Срок службы медицинского изделия	81
31. Гарантия производителя	81
32. Рекламация	83
Общий габаритный чертёж	85
Информация об электромагнитной совместимости	146

1. Наименование медицинского изделия

Обеззараживатели-очистители фотокаталитические воздуха Аэролайф КФУ2-150 по ТУ 32.50.50-002-44999832-2022

Варианты исполнения:

1. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х150, размер (Д х Ш х В) 1400 х 310 х 290, в составе:
 - 1.1. КФУ2-150х150, размер (Д х Ш х В) 1400 х 310 х 290 – 1 шт.
 - 1.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
2. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х150, размер (Д х Ш х В) 1500 х 310 х 290, в составе:
 - 2.1. КФУ2-150х150, размер (Д х Ш х В) 1500 х 310 х 290 – 1 шт.
 - 2.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
 - 2.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
3. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х150У, размер (Д х Ш х В) 880 х 325 х 355, в составе:
 - 3.1. КФУ2-150х150У, размер (Д х Ш х В) 880 х 325 х 355 – 1 шт.
 - 3.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
4. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1400 х 290 х 480, в составе:
 - 4.1. КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1400 х 290 х 480 – 1 шт.
 - 4.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
5. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1500 х 290 х 480, в составе:
 - 5.1. КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1500 х 290 х 480 – 1 шт.
 - 5.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
 - 5.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
6. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 290, в составе:
 - 6.1. КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 290 – 1 шт.
 - 6.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
7. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1500 х 480 х 290, в составе:
 - 7.1. КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1500 х 480 х 290 – 1 шт.
 - 7.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
 - 7.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
8. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х300У, размер (Д х Ш х В) 880 х 550 х 355, в составе:
 - 8.1. КФУ2-150х300У, размер (Д х Ш х В) 880 х 550 х 355 – 1 шт.
 - 8.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
9. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1400 х 290 х 660, в составе:
 - 9.1. КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1400 х 290 х 660 – 1 шт.
 - 9.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.

10. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1500 х 290 х 660, в составе:
 - 10.1. КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1500 х 290 х 660 – 1 шт.
 - 10.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
 - 10.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
11. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1400 х 660 х 290, в составе:
 - 11.1. КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1400 х 660 х 290 – 1 шт.
 - 11.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
12. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1500 х 660 х 290, в составе:
 - 12.1. КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1500 х 660 х 290 – 1 шт.
 - 12.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
 - 12.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
13. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 480, в составе:
 - 13.1. КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 480 – 1 шт.
 - 13.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
14. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1500 х 480 х 480, в составе:
 - 14.1. КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1500 х 480 х 480 – 1 шт.
 - 14.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
 - 14.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
15. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 880 х 790 х 355, в составе:
 - 15.1. КФУ2-150х450У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 880 х 790 х 355 – 1 шт.
 - 15.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
16. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 880 х 550 х 595, в составе:
 - 16.1. КФУ2-450У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 880 х 550 х 595 – 1 шт.
 - 16.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
17. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 480, в составе:
 - 17.1. КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 480 – 1 шт.
 - 17.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
18. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1500 х 480 х 480, в составе:
 - 18.1. КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1500 х 480 х 480 – 1 шт.
 - 18.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
 - 18.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
19. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1400 х 290 х 880, в составе:
 - 19.1. КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1400 х 290 х 880 – 1 шт.
 - 19.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.

- 20. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1500 х 290 х 880, в составе:
 - 20.1. КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1500 х 290 х 880 – 1 шт.
 - 20.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
 - 20.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
- 21. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1400 х 880 х 290, в составе:
 - 21.1. КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1400 х 880 х 290 – 1 шт.
 - 21.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
- 22. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1500 х 880 х 290, в составе:
 - 22.1. КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1500 х 880 х 290 – 1 шт.
 - 22.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
 - 22.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
- 23. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 880 х 1030 х 355, в составе:
 - 23.1. КФУ2-150х600У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 880 х 1030 х 355 – 1 шт.
 - 23.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
- 24. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 880 х 550 х 595, в составе:
 - 24.1. КФУ2-150х600У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 880 х 550 х 595 – 1 шт.
 - 24.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
- 25. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600У исп. 3, размер (Д х Ш х В) 970 х 550 х 595, в составе:
 - 25.1. КФУ2-150х600У исп. 3, размер (Д х Ш х В) 970 х 550 х 595 – 1 шт.
 - 25.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
- 26. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х900, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 660, в составе:
 - 26.1. КФУ2-150х900, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 660 – 1 шт.
 - 26.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
- 27. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х900, размер (Д х Ш х В) 1500 х 480 х 660, в составе:
 - 27.1. КФУ2-150х900, размер (Д х Ш х В) 1500 х 480 х 660 – 1 шт.
 - 27.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
 - 27.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
- 28. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х900, размер (Д х Ш х В) 1400 х 660 х 480, в составе:
 - 28.1. КФУ2-150х900, размер (Д х Ш х В) 1400 х 660 х 480 – 1 шт.
 - 28.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
- 29. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х900, размер (Д х Ш х В) 1500 х 660 х 480, в составе:
 - 29.1. КФУ2-150х900, размер (Д х Ш х В) 1500 х 660 х 480 – 1 шт.
 - 29.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
 - 29.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.

30. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х900У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 880 х 790 х 595, в составе:
- 30.1. КФУ2-150х900У, исп. 1, размер (Д х Ш х В) 880 х 790 х 595 – 1 шт.
- 30.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
31. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х900У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 970 х 790 х 595, в составе:
- 31.1. КФУ2-150х900У, исп. 2, размер (Д х Ш х В) 970 х 790 х 595 – 1 шт.
- 31.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
32. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х1000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 490 х 490, в составе:
- 32.1. КФУ2-150х1000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 490 х 490 – 1 шт.
- 32.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
33. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х1000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 490 х 490, в составе:
- 33.1. КФУ2-150х1000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 490 х 490 – 1 шт.
- 33.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
- 33.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
34. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х1000У, размер (Д х Ш х В) 1450 х 420 х 420, в составе:
- 34.1. КФУ2-150х1000У, размер (Д х Ш х В) 1450 х 420 х 420 – 1 шт.
- 34.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
35. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 490, в составе:
- 35.1. КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 490 – 1 шт.
- 35.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
36. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 490, в составе:
- 36.1. КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 490 – 1 шт.
- 36.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
- 36.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
37. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 490 х 790, в составе:
- 37.1. КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 490 х 790 – 1 шт.
- 37.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
38. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 490 х 790, в составе:
- 38.1. КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 490 х 790 – 1 шт.
- 38.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
- 38.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
39. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х2000У, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 420, в составе:
- 39.1. КФУ2-150х2000У, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 420 – 1 шт.
- 39.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.

- 40. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 490, в составе:
 - 40.1. КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 490 – 1 шт.
 - 40.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
- 41. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 490, в составе:
 - 41.1. КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 490 – 1 шт.
 - 41.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
 - 41.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
- 42. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 790, в составе:
 - 42.1. КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 790 – 1 шт.
 - 42.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
- 43. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 790, в составе:
 - 43.1. КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 790 – 1 шт.
 - 43.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
 - 43.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
- 44. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х3000У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 1450 х 980 х 420, в составе:
 - 44.1. КФУ2-150х3000У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 1450 х 980 х 420 – 1 шт.
 - 44.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
- 45. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х3000У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 710, в составе:
 - 45.1. КФУ2-150х3000У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 710 – 1 шт.
 - 45.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
- 46. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1350 х 490, в составе:
 - 46.1. КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1350 х 490 – 1 шт.
 - 46.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
- 47. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1350 х 490, в составе:
 - 47.1. КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1350 х 490 – 1 шт.
 - 47.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
 - 47.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
- 48. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 490 х 1350, в составе:
 - 48.1. КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 490 х 1350 – 1 шт.
 - 48.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
- 49. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 490 х 1350, в составе:
 - 49.1. КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 490 х 1350 – 1 шт.
 - 49.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
 - 49.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.

50. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 790, в составе:
- 50.1. КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 790 – 1 шт.
- 50.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
51. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 790, в составе:
- 51.1. КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 790 – 1 шт.
- 51.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
- 51.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
52. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х4000У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 1450 х 1260 х 420, в составе:
- 52.1. КФУ2-150х4000У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 1450 х 1260 х 420 – 1 шт.
- 52.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
53. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х4000У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 710, в составе:
- 53.1. КФУ2-150х4000У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 710 – 1 шт.
- 53.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
54. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 790, в составе:
- 54.1. КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 790 – 1 шт.
- 54.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
55. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 790, в составе:
- 55.1. КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 790 – 1 шт.
- 55.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
- 55.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
56. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 1090, в составе:
- 56.1. КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 1090 – 1 шт.
- 56.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
57. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 1090, в составе:
- 57.1. КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 1090 – 1 шт.
- 57.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
- 57.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
58. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х6000У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 1450 х 980 х 710, в составе:
- 58.1. КФУ2-150х6000У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 1450 х 980 х 710 – 1 шт.
- 58.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
59. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х6000У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 990, в составе:
- 59.1. КФУ2-150х6000У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 990 – 1 шт.
- 59.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.

60. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х8000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 1350, в составе:
- 60.1. КФУ2-150х8000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 1350 – 1 шт.
- 60.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
61. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х8000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 1350, в составе:
- 61.1. КФУ2-150х8000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 1350 – 1 шт.
- 61.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
- 61.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
62. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х8000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1350 х 790, в составе:
- 62.1. КФУ2-150х8000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1350 х 790 – 1 шт.
- 62.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
63. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х8000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1350 х 790, в составе:
- 63.1. КФУ2-150х8000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1350 х 790 – 1 шт.
- 63.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
- 63.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
64. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х8000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 1090, в составе:
- 64.1. КФУ2-150х8000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 1090 – 1 шт.
- 64.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
65. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х8000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 1090, в составе:
- 65.1. КФУ2-150х8000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 1090 – 1 шт.
- 65.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
- 65.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
66. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х9000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 1090, в составе:
- 66.1. КФУ2-150х9000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 1090 – 1 шт.
- 66.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
67. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х9000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 1090, в составе:
- 67.1. КФУ2-150х9000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 1090 – 1 шт.
- 67.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
- 67.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
68. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х9000У, размер (Д х Ш х В) 1450 х 980 х 990, в составе:
- 68.1. КФУ2-150х9000У, размер (Д х Ш х В) 1450 х 980 х 990 – 1 шт.
- 68.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
69. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 1350, в составе:
- 69.1. КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 1350 – 1 шт.
- 69.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.

70. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 1350, в составе:
- 70.1. КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 1350 – 1 шт.
- 70.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
- 70.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
71. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1350 х 1090, в составе:
- 71.1. КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1350 х 1090 – 1 шт.
- 71.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
72. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1350 х 1090, в составе:
- 72.1. КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1350 х 1090 – 1 шт.
- 72.2. Предфильтр воздушный ФВК – 1 шт. (при необходимости)
- 72.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
73. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 1580, в составе:
- 73.1. КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 1580 – 1 шт.
- 73.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
74. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 1580, в составе:
- 74.1. КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 1580 – 1 шт.
- 74.2. Предфильтр воздушный ФВК – 2 шт. (при необходимости)
- 74.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
75. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 1090, в составе:
- 75.1. КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 1090 – 1 шт.
- 75.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
76. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 1090, в составе:
- 76.1. КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 1090 – 1 шт.
- 76.2. Предфильтр воздушный ФВК – 2 шт. (при необходимости)
- 76.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
77. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 1580, в составе:
- 77.1. КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 1580 – 1 шт.
- 77.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
78. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 1580, в составе:
- 78.1. КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 1580 – 1 шт.
- 78.2. Предфильтр воздушный ФВК – 4 шт. (при необходимости)
- 78.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.

79. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 1350, в составе:
- 79.1. КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 1350 – 1 шт.
- 79.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
80. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 1350, в составе:
- 80.1. КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 1350 – 1 шт.
- 80.2. Предфильтр воздушный ФВК – 2 шт. (при необходимости)
- 80.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
81. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1350 х 1580, в составе:
- 81.1. КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1350 х 1580 – 1 шт.
- 81.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
82. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1350 х 1580, в составе:
- 82.1. КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1350 х 1580 – 1 шт.
- 82.2. Предфильтр воздушный ФВК – 2 шт. (при необходимости)
- 82.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
83. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х18000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 2180, в составе:
- 83.1. КФУ2-150х18000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 2180 – 1 шт.
- 83.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
84. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х18000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 2180, в составе:
- 84.1. КФУ2-150х18000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 2180 – 1 шт.
- 84.2. Предфильтр воздушный ФВК – 2 шт. (при необходимости)
- 84.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
85. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х18000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 1090, в составе:
- 85.1. КФУ2-150х18000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 1090 – 1 шт.
- 85.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
86. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х18000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 1090, в составе:
- 86.1. КФУ2-150х18000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 1090 – 1 шт.
- 86.2. Предфильтр воздушный ФВК – 2 шт. (при необходимости)
- 86.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
87. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х20000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 1880, в составе:
- 87.1. КФУ2-150х20000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 1880 – 1 шт.
- 87.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.

88. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х20000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 1880, в составе:
- 88.1. КФУ2-150х20000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 1880 – 1 шт.
- 88.2. Предфильтр воздушный ФВК – 4 шт. (при необходимости)
- 88.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
89. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х24000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 1580, в составе:
- 89.1. КФУ2-150х24000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 1580 – 1 шт.
- 89.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
90. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х24000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 1580, в составе:
- 90.1. КФУ2-150х24000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 1580 – 1 шт.
- 90.2. Предфильтр воздушный ФВК – 4 шт. (при необходимости)
- 90.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
91. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х24000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 2180, в составе:
- 91.1. КФУ2-150х24000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 2180 – 1 шт.
- 91.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
92. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х24000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 2180, в составе:
- 92.1. КФУ2-150х24000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 2180 – 1 шт.
- 92.2. Предфильтр воздушный ФВК – 4 шт. (при необходимости)
- 92.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
93. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х30000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 1880, в составе:
- 93.1. КФУ2-150х30000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 1880 – 1 шт.
- 93.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
94. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х30000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 1880, в составе:
- 94.1. КФУ2-150х30000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 1880 – 1 шт.
- 94.2. Предфильтр воздушный ФВК – 4 шт. (при необходимости)
- 94.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
95. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х36000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 2180, в составе:
- 95.1. КФУ2-150х36000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 2180 – 1 шт.
- 95.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
96. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х36000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 2180, в составе:
- 96.1. КФУ2-150х36000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 2180 – 1 шт.
- 96.2. Предфильтр воздушный ФВК – 4 шт. (при необходимости)
- 96.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.

97. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 3160, в составе:
- 97.1. КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 3160 – 1 шт.
- 97.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
98. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 3160, в составе:
- 98.1. КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 3160 – 1 шт.
- 98.2. Предфильтр воздушный ФВК – 8 шт. (при необходимости)
- 98.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
99. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2500 х 2180 х 3160, в составе:
- 99.1. КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2500 х 2180 х 3160 – 1 шт.
- 99.2. Предфильтр воздушный ФВК – 8 шт. (при необходимости)
- 99.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
100. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 2700, в составе:
- 100.1. КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 2700 – 1 шт.
- 100.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
101. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 2700, в составе:
- 101.1. КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 2700 – 1 шт.
- 101.2. Предфильтр воздушный ФВК – 4 шт. (при необходимости)
- 101.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
102. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2500 х 2180 х 2700, в составе:
- 102.1. КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2500 х 2180 х 2700 – 1 шт.
- 102.2. Предфильтр воздушный ФВК – 4 шт. (при необходимости)
- 102.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
103. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2700 х 2180, в составе:
- 103.1. КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2700 х 2180 – 1 шт.
- 103.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
104. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2700 х 2180, в составе:
- 104.1. КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2700 х 2180 – 1 шт.
- 104.2. Предфильтр воздушный ФВК – 4 шт. (при необходимости)
- 104.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
105. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2500 х 2700 х 2180, в составе:
- 105.1. КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2500 х 2700 х 2180 – 1 шт.
- 105.2. Предфильтр воздушный ФВК – 4 шт. (при необходимости)
- 105.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.

106. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2370 х 3270, в составе:
106.1. КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2370 х 3270 – 1 шт.
106.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
107. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2370 х 3270, в составе:
107.1. КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2370 х 3270 – 1 шт.
107.2. Предфильтр воздушный ФВК – 9 шт. (при необходимости)
107.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
108. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2500 х 2370 х 3270, в составе:
108.1. КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2500 х 2370 х 3270 – 1 шт.
108.2. Предфильтр воздушный ФВК – 9 шт. (при необходимости)
108.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
109. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2900 х 2370 х 3270, в составе:
109.1. КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2900 х 2370 х 3270 – 1 шт.
109.2. Предфильтр воздушный ФВК – 9 шт. (при необходимости)
109.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
110. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 3270 х 2370, в составе:
110.1. КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 3270 х 2370 – 1 шт.
110.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
111. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 3270 х 2370, в составе:
111.1. КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 3270 х 2370 – 1 шт.
111.2. Предфильтр воздушный ФВК – 9 шт. (при необходимости)
111.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
112. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2500 х 3270 х 2370, в составе:
112.1. КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2500 х 3270 х 2370 – 1 шт.
112.2. Предфильтр воздушный ФВК – 9 шт. (при необходимости)
112.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
113. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2900 х 3270 х 2370, в составе:
113.1. КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2900 х 3270 х 2370 – 1 шт.
113.2. Предфильтр воздушный ФВК – 9 шт. (при необходимости)
113.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
114. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х72000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 4360, в составе:
114.1. КФУ2-150х72000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 4360 – 1 шт.
114.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.

115. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х72000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 4360, в составе:
115.1. КФУ2-150х72000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 4360 – 1 шт.
115.2. Предфильтр воздушный ФВК – 8 шт. (при необходимости)
115.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
116. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х72000, размер (Д х Ш х В) 3100 х 2180 х 4360, в составе:
116.1. КФУ2-150х72000, размер (Д х Ш х В) 3100 х 2180 х 4360 – 1 шт.
116.2. Предфильтр воздушный ФВК – 8 шт. (при необходимости)
116.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
117. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х72000, размер (Д х Ш х В) 3500 х 2180 х 4360, в составе:
117.1. КФУ2-150х72000, размер (Д х Ш х В) 3500 х 2180 х 4360 – 1 шт.
117.2. Предфильтр воздушный ФВК – 8 шт. (при необходимости)
117.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
118. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х81000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 3270 х 3270, в составе:
118.1. КФУ2-150х81000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 3270 х 3270 – 1 шт.
118.2. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
119. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х81000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 3270 х 3270, в составе:
119.1. КФУ2-150х81000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 3270 х 3270 – 1 шт.
119.2. Предфильтр воздушный ФВК – 9 шт. (при необходимости)
119.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
120. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х81000, размер (Д х Ш х В) 3100 х 3270 х 3270, в составе:
120.1. КФУ2-150х81000, размер (Д х Ш х В) 3100 х 3270 х 3270 – 1 шт.
120.2. Предфильтр воздушный ФВК – 9 шт. (при необходимости)
120.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.
121. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х81000, размер (Д х Ш х В) 3500 х 3270 х 3270, в составе:
121.1. КФУ2-150х81000, размер (Д х Ш х В) 3500 х 3270 х 3270 – 1 шт.
121.2. Предфильтр воздушный ФВК – 9 шт. (при необходимости)
121.3. Технический паспорт — руководство по эксплуатации.

** Производитель оставляет за собой право изменять габариты оборудования ($\pm 15\%$) без изменения эффективности и степени обеззараживания систем очистки воздуха.*

*** Все размеры обеззараживателей приведены в мм.*

Сведения о разработчике медицинского изделия

Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД АЭРОЛАЙФ» (ООО «ЗАВОД АЭРОЛАЙФ»)

Адрес: 249020, Калужская область, Боровский р-н, д. Добрино, 6-й Восточный проезд, владение № 1

тел.: +7 (495) 923-27-20; e-mail: info@airlife.ru

2. Сведения о производителе медицинского изделия

Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД АЭРОЛАЙФ» (ООО «ЗАВОД АЭРОЛАЙФ»)

Адрес: 249020, Калужская область, Боровский р-н, д. Добрино, 6-й Восточный проезд, владение № 1

тел.: +7 (495) 923 27 20, e-mail: info@airlife.ru

3. Место производства

Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД АЭРОЛАЙФ» (ООО «ЗАВОД АЭРОЛАЙФ»)

Адрес: 249020, Калужская область, Боровский р-н, д. Добрино, 6-й Восточный проезд, владение № 1

тел.: +7 (495) 923 27 20, e-mail: info@airlife.ru

4. Классификация

Вышеуказанные обеззараживатели соответствуют виду климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

По последствиям отказа в процессе использования обеззараживатели относятся к классу В по РД 50-707

По характеру воспринимаемых механических воздействий обеззараживатель относится к группе 2 по ГОСТ Р 50444.

По степени защиты от опасностей поражения электрическим током обеззараживатель относится к классу I без рабочей части по ГОСТ Р МЭК 60601-1.

По степени защиты от проникновения воды и твёрдых частиц обеззараживатель классифицируется как IPX0.

В зависимости от потенциального риска применения обеззараживатели, в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России № 4н от 06.06.2012г. «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» относятся к классу I.

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – 152700 (Очиститель воздуха, фильтрующий высокоэффективный, стационарный).

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 32.50.50.190.

5. Назначение

Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150 (далее — система очистки и обеззараживания, прибор, оборудование, система) предназначен для удаления из обрабатываемого воздушного потока всех типов органических и неорганических загрязнителей, уничтожает любые виды микроорганизмов.

Оборудование размещается в системе технологической вентиляции здания и обеспечивает очистку и обеззараживание приточного / вытяжного / рециркуляционного или частично рециркуляционного воздуха (за счёт отдельных нагнетателей воздуха).

Максимальная эффективность очистки и обеззараживания воздуха достигается при постоянной работе прибора в режиме 24/7 (24 часа / 7 дней в неделю).

6. Область применения

Оборудование предназначено для работы в медицинских учреждениях для очистки и обеззараживания:

- приточного воздуха в чистых медицинских помещениях с нормируемыми параметрами по обсеменённости воздуха (классы чистоты А и Б),
- приточного воздуха в чистых помещениях классов 3 ИСО – 8 ИСО,
- вытяжного воздуха из инфекционных отделений и туберкулёзных диспансеров (отделений),
- вытяжного воздуха из химических и микробиологических лабораторий, в которых производятся работы с микроорганизмами с I по IV группу патогенности и существует необходимость очистки и обеззараживания воздуха от биологических и химических загрязнителей, в том числе БОВ, токсинов, неприятных запахов и т. п.,
- приточного / вытяжного / рециркуляционного или частично рециркуляционного воздуха в любых помещениях медицинского назначения.

Помимо этого, оборудование используется в местах массового скопления людей, на предприятиях, где предъявляются повышенные требования к качеству воздушной среды.

7. Потенциальные потребители медицинского изделия

Персонал и пациенты лечебно-профилактических учреждений. Сотрудники предприятий и организаций, где предъявляются повышенные требования к качеству воздушной среды.

8. Показания к применению, противопоказания и возможные побочные эффекты

Показания: необходимость высокоэффективной очистки и обеззараживания воздуха в системах приточной, рециркуляционной и вытяжной вентиляции лечебно-профилактических учреждений. Соответствие качества воздушной среды установленным нормативам.

Противопоказания к применению: при применении в соответствии с технической и эксплуатационной документацией и соблюдении техники безопасности — не имеет противопоказаний.

Возможные побочные эффекты: не выявлены.

9. Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства или материалов животного или человеческого происхождения.

В медицинском изделии отсутствуют лекарственные средства и материалы животного или человеческого происхождения.

10. Вид контакта с организмом

Контакт с организмом человека отсутствует.

11. Описание медицинского изделия

Оборудование представляет собой каскад фильтрующих элементов, которые связаны между собой не только механически, но и физико-химически, то есть каждый этап фильтрации повышает эффективность последующей ступени. Фильтрующие элементы размещены в едином корпусе.

Оборудование встраивается в систему технологической вентиляции здания и обеспечивает очистку и обеззараживание приточного / вытяжного / рециркуляционного или частично рециркуляционного воздуха (за счёт отдельных нагнетателей воздуха).

Допускается монтаж двух и более устройств в едином внешнем корпусе.

Допускается монтаж двух и более устройств связанных между собой по воздуху.

Допускается объединение двух и более устройств в общий электрический щит управления.

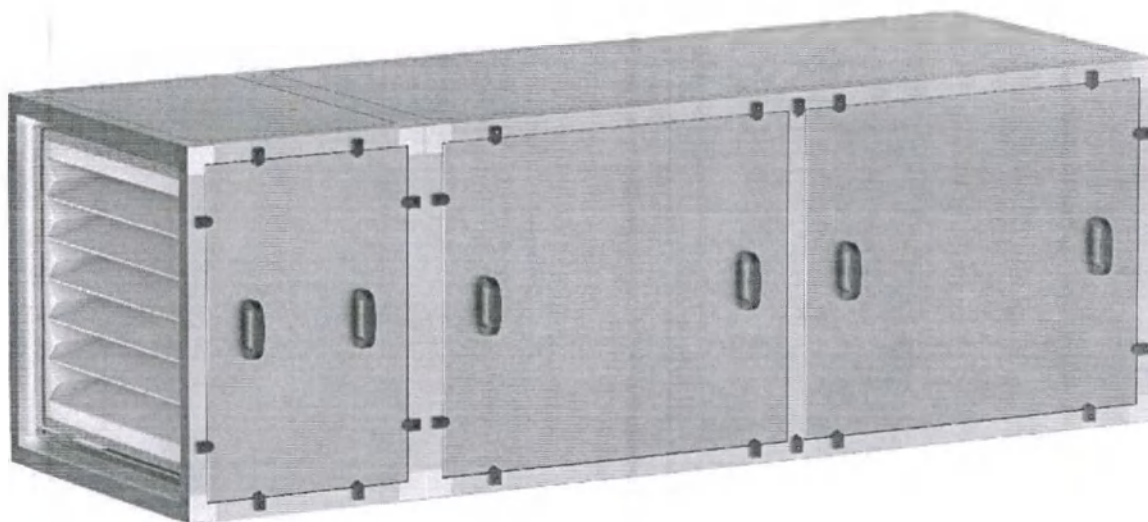


Рис.1. Внешний вид медицинского изделия
(в зависимости от габаритов изделия допускаются отличия)

12. Описание основных функциональных элементов медицинского изделия

Описание основных функциональных элементов медицинского изделия Аэролайф КФУ2-150хXXX (где «XXX» — это габаритный размер обеззараживателя):

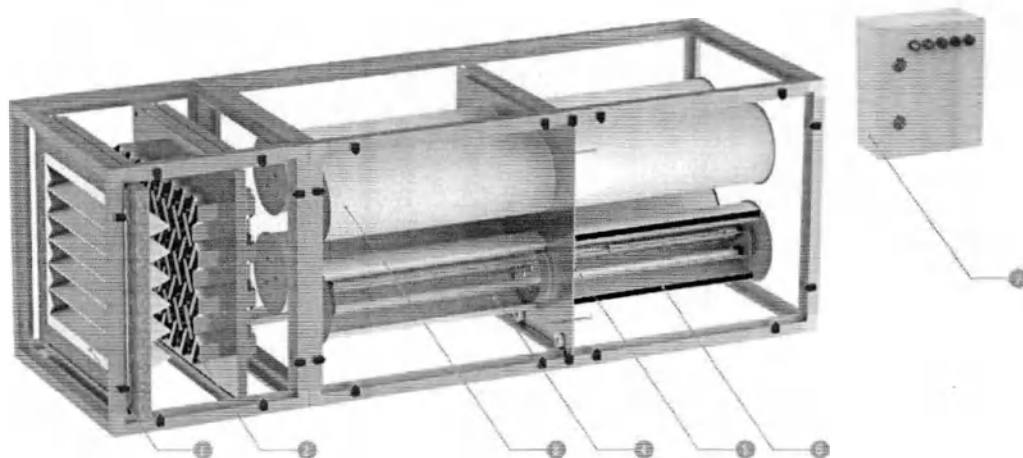


Рис.2. Основные функциональные элементы медицинского изделия Аэролайф КФУ2-150хXXX

1. **Предварительный фильтр** (поставляется опционально).
2. **Блок зарядки аэрозолей** обеспечивает симметричное электростатическое поле внутри элемента и 99,9 % эффективность зарядки аэрозолей размерами 0,1 мкм – 100.
3. **Барьерный электростатический НЕРА-фильтр** задерживает аэрозоли, дымы и частицы пыли от 0,1 мкм, на которых могут быть адсорбированы неприятные запахи, токсичные химические вещества и опасные микроорганизмы. Разработанная технология позволяет использовать поляризованный пылевой НЕРА фильтр в качестве осадителя заряженных частиц, что позволяет добиться класса очистки НЕРА Е11 при минимальном сопротивлении воздушного потока. В результате достигается эффективность захвата 950 частиц из 1000 за один проход воздуха через фильтр.
4. **Фотокаталитический фильтр** окисляет летучие органические соединения, аллергены, полностью уничтожает органическое вещество бактерий, вирусов, спор.
5. **УФ-А излучатели** активируют работу фотокатализатора. В приборах используются излучатели с диапазоном излучения: 320–400 нм (УФ-А диапазон), что позволяет использовать оборудование в присутствии людей
6. **Адсорбционно-каталитический фильтр** адсорбирует летучие органические соединения (ЛОС) и, в случае залповых выбросов, равномерно их выдаёт на фотокаталитический блок, разлагает озон, образующийся на блоке зарядки аэрозолей.
7. **Блок управления автоматики и сигнализации (щит)** позволяет контролировать работу установки очистки воздуха.

Обеззараживатели-очистители фотокаталитические воздуха Аэролайф КФУ2-150 имеют в своём составе неотъемлемую часть — щит управления и автоматики. Щит служит для запуска и отслеживания работы обеззараживателя.

Описание основных функциональных элементов медицинского изделия
Аэролайф КФУ2-150хXXXУ (где «XXX» — это габаритный размер обеззараживателя):

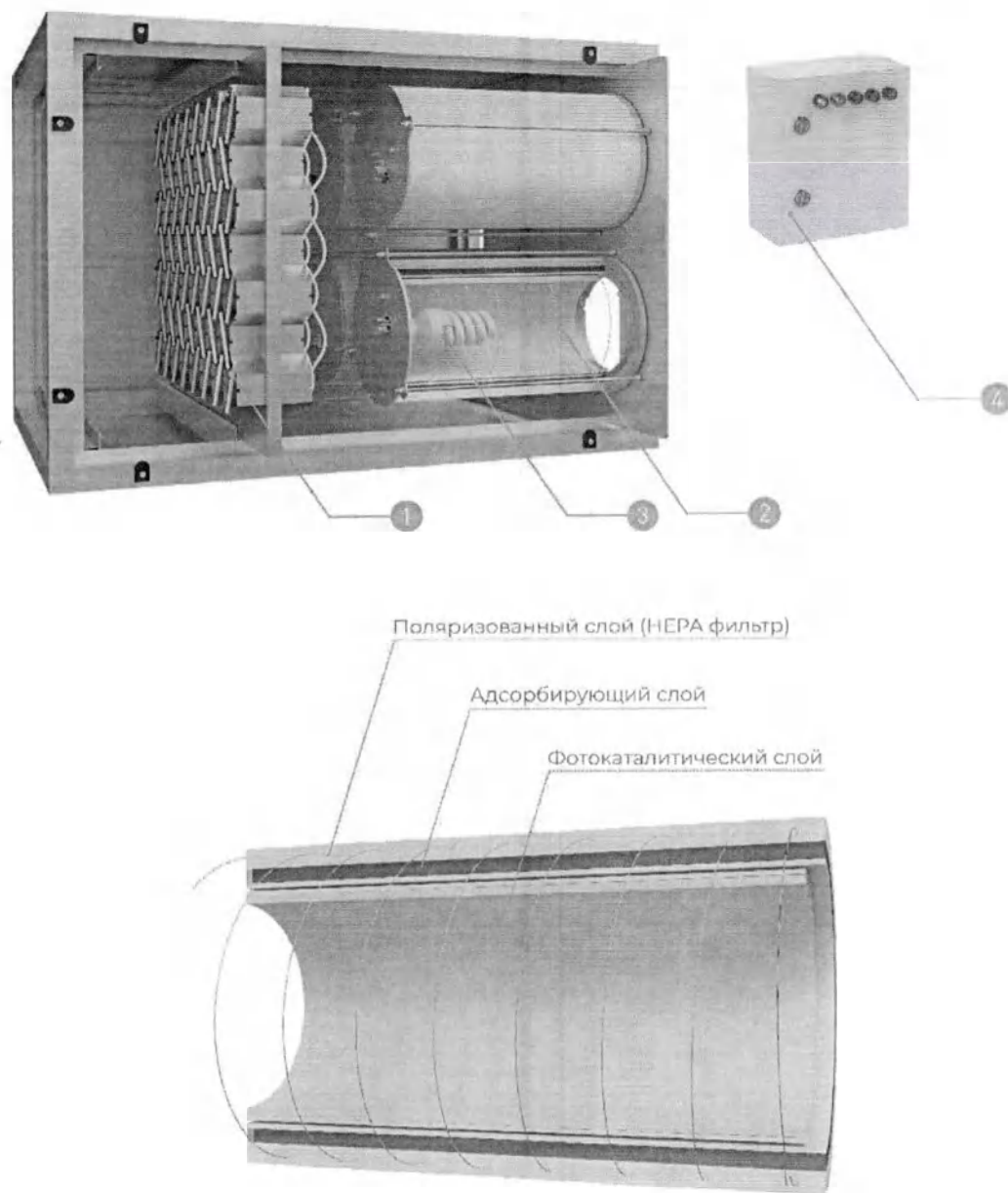


Рис.3. Основные функциональные элементы медицинского изделия
Аэролайф КФУ2-150хXXXУ

1. **Блок зарядки аэрозолей** обеспечивает симметричное электростатическое поле внутри элемента и 99,9 % эффективность зарядки аэрозолей размерами 0,1 мкм – 100.
2. **Комбинированный поляризованный адсорбционно-фотокаталитический фильтр** улавливает частицы размером до 0,1 мкм, адсорбирует неприятные запахи, токсичные химические вещества, аллергены, вирусы, бактерии и т.д. Технология позволяет использовать поляризованный фильтр в качестве осадителя заряженных частиц. Адсорбционно-фотокаталитическая стадия предотвращает проникновение вредных

веществ, поглощая их на поверхности каталитически активного модифицированного углеродного сорбента. Технология совместного действия адсорбции и фотокатализа делает комбинированный фильтр эффективным и регенерируемым в процессе эксплуатации. Фотокатализатор окисляет микроорганизмические вещества, летучие органические соединения и аллергены до безвредных компонентов — углекислого газа, воды и атмосферного азота.

3. **УФ-А излучатели** активируют работу фотокатализатора. В приборах используются излучатели с диапазоном излучения: 320–400 нм (УФ-А диапазон), что позволяет использовать оборудование в присутствии людей.
4. **Блок управления автоматике и сигнализации (щит)** позволяет контролировать работу установки очистки воздуха.

В изделиях применяется новейшая технология фотокаталитической минерализации токсичных примесей воздуха на поверхности фотокатализатора. Очистка воздуха происходит при комнатной температуре под воздействием безопасного ультрафиолетового излучения диапазона А (320–400 нм). Токсичные примеси воздуха не накапливаются в воздухоочистителе, а полностью разлагаются до безвредных компонентов воздуха — двуокиси углерода (углекислого газа) и воды.

В изделиях используется нанокристаллический платинированный фотокатализатор Pt(Pd)/TiO₂, допированный палладием, с максимально возможным квантовым выходом элементарной стадии фотоокисления. Установленный в воздухоочистителях пылевой фильтр HEPA задерживает мельчайшие частицы пыли, пыльцу.

Прибор очищает воздух не только от всевозможных вирусов и бактерий, но и от любых токсичных загрязнений, включая окись углерода (угарный газ), окислы азота и формальдегид, которые, как известно, являются основными опасными загрязнителями воздуха и не поддаются очистке методами основанными на жёстком УФ-С излучении.

13. Щит управления автоматике и сигнализации

Обеззараживатели-очистители фотокаталитические воздуха Аэролайф КФУ2-150 имеют в своём составе неотъемлемую часть — щит управления и автоматике. Щит служит для запуска и отслеживания работы обеззараживателя.

Виды щита:

1. **Щит с сигнализацией.**

Габаритные размеры (мм): 250 x 300 x 150 ± 10%

Напряжение: 220/380В

Частота: 50 Гц

2. **Щит с сигнализацией и диспетчеризацией.**

Габаритные размеры (мм): 400 x 300 x 150 ± 10%

Напряжение: 220 В

Частота: 50 Гц

** Согласно техническому заданию, щит может быть интегрирован в корпус установки очистки.*

Описание наружных индикаторов (ламп)

- Наружные индикаторы служат для сигнализации о состоянии обеззараживателя.
- Зелёный индикатор сигнализирует о включении обеззараживателя в работу.
- Красный индикатор сигнализирует о выходе из строя блока высокого напряжения (БВН).
- Количество красных сигнальных ламп зависит от количества блока высокого напряжения (БВН), входящих в состав щита.

Количество установленных наружных индикаторов в медицинском изделии (МИ):

- КФУ2-150х150 – КФУ2-150х9000 одна красная сигнальная лампа;
- КФУ2-150х12000 одна или две красные сигнальные лампы (в зависимости от комплектации);
- КФУ2- 150х16000 - КФУ2-150х18000 две красные сигнальные лампы;
- КФУ2- 150х20000, КФУ2-150х24000, КФУ2-150х30000, КФУ2-150х36000 четыре красные сигнальные лампы;
- КФУ2-150х48000 четыре или восемь красных сигнальных ламп (в зависимости от комплектации);
- КФУ2-150х54000, КФУ2-150х81000 девять красных сигнальных ламп;
- КФУ2-150х72000 восемь красных сигнальных ламп.

Установленные щиты:

Обеззараживатели производительностью 150–36000 м³/ч (включительно) имеют 1 щит управления по желанию заказчика (исходя из Технического Задания).

Обеззараживатели производительностью более 36000 м³/ч имеют 2 и более щитов управления по желанию заказчика (исходя из Технического Задания).

** Производитель имеет право за собой менять количество щитов согласно конструктивным особенностям проектируемого объекта.*

14. Принцип действия

Системы Аэролайф КФУ2-150 построены на комплексной технологии очистки и обеззараживания воздуха (КТОВ). Оборудование представляет собой каскад фильтрующих элементов, которые связаны между собой не только механически, но и физико-химически, то есть каждый этап фильтрации повышает эффективность последующей ступени.

Совместная работа механических, электростатических, барьерных, фотокаталитических и адсорбционно-каталитических фильтров позволяет с высокой эффективностью удалять из обрабатываемого воздушного потока все виды загрязнителей: аэрозольные, химические и микробиологические.

При этом все молекулы газофазных химических загрязнителей и все типы микроорганизмов (в том числе вирусы и бактерии) адсорбируются на поверхности фотокатализатора и, под действием ультрафиолетового излучения диапазона А, разлагаются до безвредных составляющих: углекислого газа, атмосферного азота и воды. Таким образом патогенные микроорганизмы не накапливаются на фильтрующих элементах, так как полностью инактивируются (окисляются) в процессе работы системы.

15. Основные классы уничтожаемых загрязнителей

К основным классам относятся:

- Микробиологические загрязнители: вирусы, бактерии, споры грибов и т. д.;
- Химические загрязнители: неприятные запахи, окислы азота, озон, фенол, формальдегид, стирол и другие токсичные и опасные химические соединения.;
- Аэрозольные загрязнители: мелкодисперсные частицы пыли от крупных до наноразмерных, сажа и копоть, пар.

16. Технические характеристики медицинского изделия

16.1. Основные параметры и характеристики

16.1.1. Обеззараживатели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р МЭК 60601-1, настоящих технических условий и комплекту конструкторской документации.

16.1.2. Массогабаритные характеристики обеззараживателей должны соответствовать Таблице 1.

Таблица 1. Массогабаритные характеристики «Обеззараживатели-очистители фотокаталитические воздуха Аэролайф КФУ2-150 по ТУ 32.50.50-002-44999832-2022»

№	Модель	Масса, кг (±15%)	Габариты обеззараживателя, мм (±15%)			Габариты предфильтра, мм (±15%)	
			Длина	Ширина	Высота	Наименование предфильтра	Ширина x Высота, Глубина кармана (ГК)
1	КФУ2-150x150, размер (Д x Ш x В) 1400 x 310 x 290	31	1400	310	290	—	—
2	КФУ2-150x150, размер (Д x Ш x В) 1500 x 310 x 290	31	1500	310	290	Предфильтр воздушный ФВК-S- 285-205-100	285 x 205, ГК – 100
3	КФУ2-150x150У, размер (Д x Ш x В) 880 x 325 x 355	15	880	325	355	—	—
4	КФУ2-150x300, размер (Д x Ш x В) 1400 x 290 x 480	45	1400	290	480	—	—
5	КФУ2-150x300, размер (Д x Ш x В) 1500 x 290 x 480	45	1500	290	480	Предфильтр воздушный ФВК-S- 285-375-100	285 x 375, ГК – 100
6	КФУ2-150x300, размер (Д x Ш x В) 1400 x 480 x 290	45	1400	480	290	—	—
7	КФУ2-150x300, размер (Д x Ш x В) 1500 x 480 x 290	45	1500	480	290	Предфильтр воздушный ФВК-S- 475-185-100	475 x 185, ГК – 100

8	КФУ2-150х300У, размер (Д х Ш х В) 880 х 550 х 355	30	880	550	355	—	—
9	КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1400 х 290 х 660	55	1400	290	660	—	—
10	КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1500 х 290 х 660	55	1500	290	660	Предфильтр воздушный ФВК-S- 285-555-100	285 х 555, ГК – 100
11	КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1400 х 660 х 290	55	1400	660	290	—	—
12	КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1500 х 660 х 290	55	1500	660	290	Предфильтр воздушный ФВК-S- 655-185-100	655 х 185, ГК – 100
13	КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 480	55	1400	480	480	—	—
14	КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1 500 х 480 х 480	55	1500	480	480	Предфильтр воздушный ФВК-S- 475-375-100	475 х 375, ГК – 100
15	КФУ2-150х450У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 880 х 790 х 355	40	880	790	355	—	—
16	КФУ2-150х450У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 880 х 550 х 595	40	880	550	595	—	—
17	КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 480	64	1400	480	480	—	—
18	КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1500 х 480 х 480	64	1500	480	480	Предфильтр воздушный ФВК-S- 475-375-100	475 х 375, ГК – 100
19	КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1400 х 290 х 880	64	1400	290	880	—	—
20	КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1500 х 290 х 880	64	1500	290	880	Предфильтр воздушный ФВК-S- 285-775-100	285 х 775, ГК – 100
21	КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1400 х 880 х 290	64	1400	880	290	—	—
22	КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1500 х 880 х 290	64	1500	880	290	Предфильтр воздушный ФВК-S- 875-185-100	875 х 185, ГК – 100
23	КФУ2-150х600У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 880 х 1030 х 355	55	880	1030	355	—	—
24	КФУ2-150х600У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 880 х 550 х 595	55	880	550	595	—	—

25	КФУ2-150х600У исп. 3, размер (Д х Ш х В) 970 х 550 х 595	45	970	550	595	—	—
26	КФУ2-150х900, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 660	76	1400	480	660	—	—
27	КФУ2-150х900, размер (Д х Ш х В) 1500 х 480 х 660	76	1500	480	660	Предфильтр воздушный ФВК-S- 475-555-100	475 х 555, ГК – 100
28	КФУ2-150х900, размер (Д х Ш х В) 1400 х 660 х 480	76	1400	660	480	—	—
29	КФУ2-150х900, размер (Д х Ш х В) 1500 х 660 х 480	76	1500	660	480	Предфильтр воздушный ФВК-S- 655-375-100	665 х 375, ГК – 100
30	КФУ2-150х900У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 880 х 790 х 595	65	880	790	595	—	—
31	КФУ2-150х900У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 970 х 790 х 595	65	970	790	595	—	—
32	КФУ2-150х1000 размер (Д х Ш х В) 2100 х 490 х 490	65	2100	490	490	—	—
33	КФУ2-150х1000 размер (Д х Ш х В) 2300 х 490 х 490	65	2300	490	490	Предфильтр воздушный ФВК-S- 485-365-100	485 х 365, ГК – 100
34	КФУ2-150х1000У, размер (Д х Ш х В) 1450 х 420 х 420	80	1450	420	420	—	—
35	КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 490	100	2100	790	490	—	—
36	КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 490	100	2300	790	490	Предфильтр воздушный ФВК-S- 785-365-100	785 х 365, ГК – 100
37	КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 490 х 790	100	2100	490	790	Предфильтр воздушный ФВК-S- 485-665-100	485 х 665, ГК – 100
38	КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 490 х 790	100	2300	490	790	—	—
39	КФУ2-150х2000У, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 420	90	1450	700	420	—	—
40	КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 490	140	2100	1090	490	—	—
41	КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 490	140	2300	1090	490	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-365-100	1085 х 365, ГК – 100

42	КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 790	140	2100	790	790	—	—
43	КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 790	140	2300	790	790	Предфильтр воздушный ФВК-S- 785-665-100	785 х 665, ГК – 100
44	КФУ2-150х3000У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 1450 х 980 х 420	110	1450	980	420	—	—
45	КФУ2-150х3000У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 710	110	1450	700	710	—	—
46	КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1350 х 490	190	2100	1350	490	—	—
47	КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1350 х 490	190	2300	1350	490	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1345-365-100	1345 х 365, ГК – 100
48	КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 490 х 1350	190	2100	490	1350	—	—
49	КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 490 х 1350	190	2300	490	1350	Предфильтр воздушный ФВК-S- 485-1225-100	485 х 1225, ГК – 100
50	КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 790	190	2100	790	790	—	—
51	КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 790	190	2300	790	790	Предфильтр воздушный ФВК-S- 785-665-100	785 х 665, ГК – 100
52	КФУ2-150х4000У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 1450 х 1260 х 420	150	1450	1260	420	—	—
53	КФУ2-150х4000У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 710	150	1450	700	710	—	—
54	КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 790	220	2100	1090	790	—	—
55	КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 790	220	2300	1090	790	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-665-100	1085 х 665, ГК – 100
56	КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 1090	220	2100	790	1090	—	—
57	КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 1090	220	2300	790	1090	Предфильтр воздушный ФВК-S- 785-965-100	785 х 965, ГК – 100

58	КФУ2-150х6000У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 1450 x 980 x 710	180	1450	980	710	—	—
59	КФУ2-150х6000У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 1450 x 700 x 990	180	1450	700	990	—	—
60	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 1350	260	2100	790	1350	—	—
61	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 1350	260	2300	790	1350	Предфильтр воздушный ФВК-S- 785-1225-100	785 x 1225, ГК – 100
62	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 790	260	2100	1350	790	—	—
63	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 790	260	2300	1350	790	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1345-665-100	1345 x 665, ГК – 100
64	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1090	260	2100	1090	1090	—	—
65	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1090	260	2300	1090	1090	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-965-100	1085 x 965, ГК – 100
66	КФУ2-150х9000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1090	310	2100	1090	1090	—	—
67	КФУ2-150х9000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1090	310	2300	1090	1090	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-965-100	1085 x 965, ГК – 100
68	КФУ2-150х9000У, размер (Д x Ш x В) 1450 x 980 x 990	260	1450	980	990	—	—
69	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1350	400	2100	1350	1090	—	—
70	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1350	400	2300	1350	1090	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1345-965-100	1345 x 965, ГК – 100
71	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 1090	400	2100	1350	1090	—	—
72	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 1090	400	2300	1350	1090	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1345-965-100	1345 x 965, ГК – 100
73	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1580	400	2100	1090	1580	—	—
74	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1580	400	2300	1090	1580	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-1225-100	1085 x 1225, ГК – 100

75	КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 1090	400	2100	1580	1090	—	—
76	КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 1090	400	2300	1580	1090	Предфильтр воздушный ФВК-S- 785-965-100 – 2 шт.	785 х 965, ГК – 100 2 шт.
77	КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 1580	480	2100	1580	1580	—	—
78	КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 1580	480	2300	1580	1580	Предфильтр воздушный ФВК-S- 785-665-100 – 4 шт.	785 х 665, ГК – 100 – 4 шт.
79	КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1350 х 1580	480	2100	1350	1580	—	—
80	КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1350 х 1580	480	2300	1350	1580	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1345-665-100 – 2 шт.	1345 х 665, ГК – 100 – 2 шт.
81	КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 1350	480	2100	1580	1350	—	—
82	КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 1350	480	2300	1580	1350	Предфильтр воздушный ФВК-S- 785-1225-100 – 2 шт.	785 х 1225, ГК – 100 – 2 шт.
83	КФУ2-150х18000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 2180	600	2100	1090	2180	—	—
84	КФУ2-150х18000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 2180	600	2300	1090	2180	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-965-100 – 2 шт.	1085 х 965, ГК – 100 – 2 шт.
85	КФУ2-150х18000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 1090	600	2100	2180	1090	—	—
86	КФУ2-150х18000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 1090	600	2300	2180	1090	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-965-100 – 2 шт.	1085 х 965, ГК – 100 – 2 шт.
87	КФУ2-150х20000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 1880	680	2100	1580	1880	—	—
88	КФУ2-150х20000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 1880	680	2300	1580	1880	Предфильтр воздушный ФВК-S- 785-965-100 – 2 шт.	785 х 965, ГК – 100 – 2 шт.
						Предфильтр воздушный ФВК-S- 785-665-100 – 2 шт.	785х665 , ГК – 100 – 2 шт.

89	КФУ2-150х24000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 1580	720	2100	2180	1580	—	—
90	КФУ2-150х24000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 1580	720	2300	2180	1580	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-665-100 – 4 шт.	1085 х 665, ГК – 100 – 4 шт.
91	КФУ2-150х24000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 2180	720	2100	1580	2180	—	—
92	КФУ2-150х24000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 2180	720	2300	1580	2180	Предфильтр воздушный ФВК-S- 785-965-100 – 4 шт.	785 х 965, ГК – 100 – 4 шт.
93	КФУ2-150х30000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 1880	960	2100	2180	1880	—	—
94	КФУ2-150х30000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 1880	960	2300	2180	1880	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-965-100 – 2 шт.	1085 х 965, ГК – 100 – 2 шт.
						Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-665-100 – 2 шт.	1085 х 665, ГК – 100 – 2 шт.
95	КФУ2-150х36000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 2180	210	2100	2180	2180	—	—
96	КФУ2-150х36000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 2180	210	2300	2180	2180	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-965-100 – 4 шт.	1085 х 965, ГК – 100 – 4 шт.
97	КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 3160	1560	2100	2180	3160	—	—
98	КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 3160	1560	2300	2180	3160	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-665-100 – 8 шт.	1085 х 665, ГК – 100 – 8 шт.
99	КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2500 х 2180 х 3160	1560	2500	2180	3160	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-665-100 – 8 шт.	1085 х 665, ГК – 100 – 8 шт.
100	КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 2700	1560	2100	2180	2700	—	—
101	КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 2700	1560	2300	2180	2700	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-1225-100 – 4 шт.	1085 х 1225, ГК – 100 – 4 шт.
102	КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2500 х 2180 х 2700	1560	2500	2180	2700	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-1225-100 – 4 шт.	1085 х 1225, ГК – 100 – 4 шт.

103	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2700 x 2180	1560	2100	2700	2180	—	—
104	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2700 x 2180	1560	2300	2700	2180	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1345-965-100 - 4 шт.	1345 x 965, ГК - 100 - 4 шт.
105	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2700 x 2180	1560	2500	2700	2180	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1345-965-100 - 4 шт.	1345 x 965, ГК - 100 - 4 шт.
106	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2370 x 3270	1980	2100	2370	3270	—	—
107	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2370 x 3270	1980	2300	2370	3270	Предфильтр воздушный ФВК-S- 785-965-100 - 9 шт.	785 x 965, ГК - 100 - 9 шт.
108	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2370 x 3270	1980	2500	2370	3270	Предфильтр воздушный ФВК-S- 785-965-100 - 9 шт.	785 x 965, ГК - 100 - 9 шт.
109	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2900 x 2370 x 3270	1980	2900	2370	3270	Предфильтр воздушный ФВК-S- 785-965-100 - 9 шт.	785 x 965, ГК - 100 - 9 шт.
110	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 3270 x 2370,	1980	2100	3270	2370	—	—
111	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 3270 x 2370,	1980	2300	3270	2370	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-665-100 - 9 шт.	1085 x 665, ГК - 100 - 9 шт.
112	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 3270 x 2370,	1980	2500	3270	2370	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-665-100 - 9 шт.	1085 x 665, ГК - 100 - 9 шт.
113	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2900 x 3270 x 2370,	1980	2900	3270	2370	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-665-100 - 9 шт.	1085 x 665, ГК - 100 - 9 шт.
114	КФУ2-150х72000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 4360	2560	2100	2180	4360	—	—
115	КФУ2-150х72000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 4360	2560	2300	2180	4360	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-965-100 - 8 шт.	1085 x 965, ГК - 100 - 8 шт.
116	КФУ2-150х72000, размер (Д x Ш x В) 3100 x 2180 x 4360	2560	3100	2180	4360	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-965-100 - 8 шт.	1085 x 965, ГК - 100 - 8 шт.
117	КФУ2-150х72000, размер (Д x Ш x В) 3500 x 2180 x 4360	2560	3500	2180	4360	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-965-100 - 8 шт.	1085 x 965, ГК - 100 - 8 шт.

118	КФУ2-150х81000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 3270 х 3270	3650	2100	3270	3270	—	—
119	КФУ2-150х81000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 3270 х 3270	3650	2300	3270	3270	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-965-100 – 9 шт.	1085 х 965, ГК – 100 – 9 шт.
120	КФУ2-150х81000, размер (Д х Ш х В) 3100 х 3270 х 3270	3650	3100	3270	3270	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-965-100 – 9 шт.	1085 х 965, ГК – 100 – 9 шт.
121	КФУ2-150х81000, размер (Д х Ш х В) 3500 х 3270 х 3270	3650	3500	3270	3270	Предфильтр воздушный ФВК-S- 1085-965-100 – 9 шт.	1085 х 965, ГК – 100 – 9 шт.

* Класс очистки для всех предфильтров — F5.

16.1.3. Количество установленных фильтров в обеззараживателях должно соответствовать Таблице 2.

Таблица 2. Количество установленных фильтров в «Обеззараживателях-очистителях фотокаталитических воздуха Аэролайф КФУ2-150 по ТУ 32.50.50-002-44999832-2022»

№	Модель обеззараживателя	Модель фильтра	Кол-во (шт.)
1	КФУ2-150х150, размер (Д х Ш х В) 1400 х 310 х 290	Аэролайф модель ФК440	1
		Аэролайф модель АК440	1
2	КФУ2-150х150, размер (Д х Ш х В) 1500 х 310 х 290	Аэролайф модель ФК440	1
		Аэролайф модель АК440	1
3	КФУ2-150х150У, размер (Д х Ш х В) 880 х 325 х 355	Аэролайф модель ФУ350	1
4	КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1400 х 290 х 480	Аэролайф модель ФК440	2
		Аэролайф модель АК440	2
5	КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1500 х 290 х 480	Аэролайф модель ФК440	2
		Аэролайф модель АК440	2
6	КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 290	Аэролайф модель ФК440	2
		Аэролайф модель АК440	2
7	КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1500 х 480 х 290	Аэролайф модель ФК440	2
		Аэролайф модель АК440	2
8	КФУ2-150х300У, размер (Д х Ш х В) КФУ2-150х300У	Аэролайф модель ФУ350	2
9	КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1400 х 290 х 660	Аэролайф модель ФК440	3
		Аэролайф модель АК440	3
10	КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1500 х 290 х 660	Аэролайф модель ФК440	3
		Аэролайф модель АК440	3

11	КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1400 x 660 x 290	Аэролайф модель ФК440	3
		Аэролайф модель АК440	3
12	КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1500 x 660 x 290	Аэролайф модель ФК440	3
		Аэролайф модель АК440	3
13	КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1400 x 480 x 480	Аэролайф модель ФК440	3
		Аэролайф модель АК440	3
14	КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1500 x 480 x 480	Аэролайф модель ФК440	3
		Аэролайф модель АК440	3
15	КФУ2-150х450У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 880 x 790 x 355	Аэролайф модель ФУ350	3
16	КФУ2-150х450У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 880 x 550 x 595	Аэролайф модель ФУ350	3
17	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1400 x 480 x 480	Аэролайф модель ФК440	4
		Аэролайф модель АК440	4
		Аэролайф модель ФК440 Ø 280	1
		Аэролайф модель АК440 Ø 275	1
18	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1500 x 480 x 480	Аэролайф модель ФК440	4
		Аэролайф модель АК440	4
		Аэролайф модель ФК440 Ø 280	1
		Аэролайф модель АК440 Ø 275	1
19	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1400 x 290 x 880	Аэролайф модель ФК440	4
		Аэролайф модель АК440	4
20	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1500 x 290 x 880	Аэролайф модель ФК440	4
		Аэролайф модель АК440	4
21	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1400 x 880 x 290	Аэролайф модель ФК440	4
		Аэролайф модель АК440	4
22	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1500 x 880 x 290	Аэролайф модель ФК440	4
		Аэролайф модель АК440	4
23	КФУ2-150х600У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 880 x 1030 x 355	Аэролайф модель ФУ350	4
24	КФУ2-150х600У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 880 x 550 x 595	Аэролайф модель ФУ350	4
25	КФУ2-150х600У исп. 3, размер (Д x Ш x В) 970 x 550 x 595	Аэролайф модель АК440 Ø 275	1
26	КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1400 x 480 x 660	Аэролайф модель ФК440	6
		Аэролайф модель АК440	6
		Аэролайф модель ФК440 Ø 280	2
		Аэролайф модель АК440 Ø 275	2

27	КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1500 x 480 x 660	Аэролайф модель ФК440	6
		Аэролайф модель АК440	6
		Аэролайф модель ФК440 Ø 280	2
		Аэролайф модель АК440 Ø 275	2
28	КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1400 x 660 x 480	Аэролайф модель ФК440	6
		Аэролайф модель АК440	6
		Аэролайф модель ФК440 Ø 280	2
		Аэролайф модель АК440 Ø 275	2
29	КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1500 x 660 x 480	Аэролайф модель ФК440	6
		Аэролайф модель АК440	6
		Аэролайф модель ФК440 Ø 280	2
		Аэролайф модель АК440 Ø 275	2
30	КФУ2-150х900У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 880 x 790 x 595	Аэролайф модель ФУ350	6
31	КФУ2-150х900У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 970 x 790 x 595	Аэролайф модель АК440 Ø 275	2
32	КФУ2-150х1000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 490 x 490	Аэролайф модель ФК800	1
		Аэролайф модель АК800	1
33	КФУ2-150х1000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 490 x 490	Аэролайф модель ФК800	1
		Аэролайф модель АК800	1
34	КФУ2-150х1000У, размер (Д x Ш x В) 1450 x 420 x 420	Аэролайф модель ФУ800	1
35	КФУ2-150х2000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 490	Аэролайф модель ФК800	2
		Аэролайф модель АК800	2
36	КФУ2-150х2000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 490	Аэролайф модель ФК800	2
		Аэролайф модель АК800	2
37	КФУ2-150х2000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 490 x 790	Аэролайф модель ФК800	2
		Аэролайф модель АК800	2
38	КФУ2-150х2000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 490 x 790	Аэролайф модель ФК800	2
		Аэролайф модель АК800	2
39	КФУ2-150х2000У, размер (Д x Ш x В) 1450 x 700 x 420	Аэролайф модель ФУ800	2
40	КФУ2-150х3000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 490	Аэролайф модель ФК800	3
		Аэролайф модель АК800	3
41	КФУ2-150х3000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 490	Аэролайф модель ФК800	3
		Аэролайф модель АК800	3
42	КФУ2-150х3000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 790	Аэролайф модель ФК800	3
		Аэролайф модель АК800	3

43	КФУ2-150х3000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 790	Аэролайф модель ФК800	3
		Аэролайф модель АК800	3
44	КФУ2-150х3000У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 1450 x 980 x 420	Аэролайф модель ФУ800	3
45	КФУ2-150х3000У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 1450 x 700 x 710	Аэролайф модель ФУ800	3
46	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 490	Аэролайф модель ФК800	4
		Аэролайф модель АК800	4
47	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 490	Аэролайф модель ФК800	4
		Аэролайф модель АК800	4
48	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 490 x 1350	Аэролайф модель ФК800	4
		Аэролайф модель АК800	4
49	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 490 x 1350	Аэролайф модель ФК800	4
		Аэролайф модель АК800	4
50	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 790	Аэролайф модель ФК800	4
		Аэролайф модель АК800	4
51	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 790	Аэролайф модель ФК800	4
		Аэролайф модель АК800	4
52	КФУ2-150х4000У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 1450 x 1260 x 420	Аэролайф модель ФУ800	4
53	КФУ2-150х4000У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 1450 x 700 x 710	Аэролайф модель ФУ800	4
54	КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 790	Аэролайф модель ФК800	6
		Аэролайф модель АК800	6
55	КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 790	Аэролайф модель ФК800	6
		Аэролайф модель АК800	6
56	КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 1090	Аэролайф модель ФК800	6
		Аэролайф модель АК800	6
57	КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 1090	Аэролайф модель ФК800	6
		Аэролайф модель АК800	6
58	КФУ2-150х6000У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 1450 x 980 x 710	Аэролайф модель ФУ800	6
59	КФУ2-150х6000У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 1450 x 700 x 990	Аэролайф модель ФУ800	6
60	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 1350	Аэролайф модель ФК800	8
		Аэролайф модель АК800	8

61	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 1350	Аэролайф модель ФК800	8
		Аэролайф модель АК800	8
62	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 790	Аэролайф модель ФК800	8
		Аэролайф модель АК800	8
63	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 790	Аэролайф модель ФК800	8
		Аэролайф модель АК800	8
64	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1090	Аэролайф модель ФК800	8
		Аэролайф модель АК800	8
65	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1090	Аэролайф модель ФК800	8
		Аэролайф модель АК800	8
66	КФУ2-150х9000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1090	Аэролайф модель ФК800	9
		Аэролайф модель АК800	9
67	КФУ2-150х9000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1090	Аэролайф модель ФК800	9
		Аэролайф модель АК800	9
68	КФУ2-150х9000У, размер (Д x Ш x В) 1450 x 980 x 990	Аэролайф модель ФУ800	9
69	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1350	Аэролайф модель ФК800	12
		Аэролайф модель АК800	12
70	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1350	Аэролайф модель ФК800	12
		Аэролайф модель АК800	12
71	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 1090	Аэролайф модель ФК800	12
		Аэролайф модель АК800	12
72	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 1090	Аэролайф модель ФК800	12
		Аэролайф модель АК800	12
73	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1580	Аэролайф модель ФК800	12
		Аэролайф модель АК800	12
74	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1580	Аэролайф модель ФК800	12
		Аэролайф модель АК800	12
75	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 1090	Аэролайф модель ФК800	12
		Аэролайф модель АК800	12
76	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 1090	Аэролайф модель ФК800	12
		Аэролайф модель АК800	12
77	КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 1580	Аэролайф модель ФК800	16
		Аэролайф модель АК800	16
78	КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 1580	Аэролайф модель ФК800	16
		Аэролайф модель АК800	16

79	КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 1350	Аэролайф модель ФК800	16
		Аэролайф модель АК800	16
80	КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 1350	Аэролайф модель ФК800	16
		Аэролайф модель АК800	16
81	КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 1580	Аэролайф модель ФК800	16
		Аэролайф модель АК800	16
82	КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 1580	Аэролайф модель ФК800	16
		Аэролайф модель АК800	16
83	КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 2180	Аэролайф модель ФК800	18
		Аэролайф модель АК800	18
84	КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 2180	Аэролайф модель ФК800	18
		Аэролайф модель АК800	18
85	КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 1090	Аэролайф модель ФК800	18
		Аэролайф модель АК800	18
86	КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 1090	Аэролайф модель ФК800	18
		Аэролайф модель АК800	18
87	КФУ2-150х20000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 1880	Аэролайф модель ФК800	20
		Аэролайф модель АК800	20
88	КФУ2-150х20000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 1880	Аэролайф модель ФК800	20
		Аэролайф модель АК800	20
89	КФУ2-150х24000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 1580	Аэролайф модель ФК800	24
		Аэролайф модель АК800	24
90	КФУ2-150х24000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 1580	Аэролайф модель ФК800	24
		Аэролайф модель АК800	24
91	КФУ2-150х24000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 2180	Аэролайф модель ФК800	24
		Аэролайф модель АК800	24
92	КФУ2-150х24000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 2180	Аэролайф модель ФК800	24
		Аэролайф модель АК800	24
93	КФУ2-150х30000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 1880	Аэролайф модель ФК800	30
		Аэролайф модель АК800	30
94	КФУ2-150х30000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 1880	Аэролайф модель ФК800	30
		Аэролайф модель АК800	30

95	КФУ2-150х36000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 2180	Аэролайф модель ФК800	36
		Аэролайф модель АК800	36
96	КФУ2-150х36000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 2180	Аэролайф модель ФК800	36
		Аэролайф модель АК800	36
97	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 3160	Аэролайф модель ФК800	48
		Аэролайф модель АК800	48
98	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 3160	Аэролайф модель ФК800	48
		Аэролайф модель АК800	48
99	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2180 x 3160	Аэролайф модель ФК800	48
		Аэролайф модель АК800	48
100	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 2700	Аэролайф модель ФК800	48
		Аэролайф модель АК800	48
101	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 2700	Аэролайф модель ФК800	48
		Аэролайф модель АК800	48
102	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2180 x 2700	Аэролайф модель ФК800	48
		Аэролайф модель АК800	48
103	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2700 x 2180	Аэролайф модель ФК800	48
		Аэролайф модель АК800	48
104	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2700 x 2180	Аэролайф модель ФК800	48
		Аэролайф модель АК800	48
105	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2700 x 2180	Аэролайф модель ФК800	48
		Аэролайф модель АК800	48
106	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2370 x 3270	Аэролайф модель ФК800	54
		Аэролайф модель АК800	54
107	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2370 x 3270	Аэролайф модель ФК800	54
		Аэролайф модель АК800	54
108	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2370 x 3270	Аэролайф модель ФК800	54
		Аэролайф модель АК800	54
109	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2900 x 2370 x 3270	Аэролайф модель ФК800	54
		Аэролайф модель АК800	54
110	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 3270 x 2370	Аэролайф модель ФК800	54
		Аэролайф модель АК800	54
111	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 3270 x 2370	Аэролайф модель ФК800	54
		Аэролайф модель АК800	54

112	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 3270 x 2370	Аэролайф модель ФК800	54
		Аэролайф модель АК800	54
113	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2900 x 3270 x 2370	Аэролайф модель ФК800	54
		Аэролайф модель АК800	54
114	КФУ2-150х72000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 4360	Аэролайф модель ФК800	72
		Аэролайф модель АК800	72
115	КФУ2-150х72000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 4360	Аэролайф модель ФК800	72
		Аэролайф модель АК800	72
116	КФУ2-150х72000, размер (Д x Ш x В) 3100 x 2180 x 4360	Аэролайф модель ФК800	72
		Аэролайф модель АК800	72
117	КФУ2-150х72000, размер (Д x Ш x В) 3500 x 2180 x 4360	Аэролайф модель ФК800	72
		Аэролайф модель АК800	72
118	КФУ2-150х81000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 3270 x 3270	Аэролайф модель ФК800	81
		Аэролайф модель АК800	81
119	КФУ2-150х81000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 3270 x 3270	Аэролайф модель ФК800	81
		Аэролайф модель АК800	81
120	КФУ2-150х81000, размер (Д x Ш x В) 3100 x 3270 x 3270	Аэролайф модель ФК800	81
		Аэролайф модель АК800	81
121	КФУ2-150х81000, размер (Д x Ш x В) 3500 x 3270 x 3270	Аэролайф модель ФК800	81
		Аэролайф модель АК800	81

16.1.4. Массогабаритные характеристики фильтров должны соответствовать Таблице 3.

Таблица 3. Массогабаритные характеристики фильтров Аэролайф

Наименование фильтра	Длина, мм (±15%)	Внеш. диаметр, мм (±15%)	Внутр. диаметр, мм (±15%)	Масса, кг (±15%)
Фильтр Аэролайф АК440	440	178	130	2,35
Фильтр Аэролайф ФК440	440	165	130	1,320
Фильтр Аэролайф АК440 ø275	440	275	220	4,4
Фильтр Аэролайф ФК440 ø280	440	280	220	2,1
Фильтр Аэролайф ФК800	800	280	220	3,6
Фильтр Аэролайф АК800	800	265	220	7,5
Фильтр Аэролайф ФУ350	350	204	146	1,67
Фильтр Аэролайф ФУ800	800	253	183	6,73

**Эффективность очистки воздуха и безопасность эксплуатации гарантируется при использовании только оригинальных фильтрующих элементов с маркировкой «Аэролайф».*

При использовании не оригинальных фильтрующих элементов в приборах Аэролайф производитель имеет право отказать в гарантийном ремонте.

16.1.5. В обеззараживателях устанавливаются УФ излучатели, но производителем не запрещается использование светодиодных излучателей с техническими характеристиками, прописанными в п. 1.1.7; п. 1.1.10 Таблица 6; в п. 1.1.17 Таблица 8 настоящих ТУ.

16.1.6. Длина волны УФ излучения должна быть от 320 до 400 нм ($\pm 10\%$).

16.1.7. Длина волны светодиодного УФ излучения должна быть от 320 до 400 нм ($\pm 10\%$).

16.1.8. Типы используемых УФ излучателей и их характеристики представлены в Таблице 4.

Таблица 4. Типы используемых УФ излучателей и их характеристики для «Обеззараживателей-очистителей фотокаталитических воздуха Аэролайф КФУ2-150 по ТУ 32.50.50-002-44999832-2022»

	Actinic BL PL-L 36W/10/4P 1CT/25	LEDVANC E ATR UVA 36/40W T8 G13	LEDVANC E ATR UVA 75W T8 G13	Philips TL80W/10R UVA	Camelion LH 26 – FS BLB E27 (26 Вт)	Philips Actinic TL – k 40w/10R
Производи- тель	Philips	LEDVANCE	LEDVANCE	Philips	Camelion	Philips
Потребляемая мощность, Вт	36	40	75	80	26	40
Ток излучателя, А	0,435	0,67	0,85	0,73	0,118	0,86
Напряжение, В	106	60	90	110	220	50
Информация о цоколе	4 pins(4p)	G13	G13	G13	E27	G13
Длина, мм	416,6	589,8	1500	1500	160	589,8
Номер по каталогу	9279034210 07	4058075682 115	4058075682 153	8711500612 62540	15279150	8711500612 23640
Вес нетто, г	104	84,5	191	350	150	156

** Возможно использование УФ излучателей других марок, но с идентичными техническими характеристиками.*

16.1.9. Количество используемых излучателей в «Обеззараживателях-очистителях фотокаталитических воздуха Аэролайф КФУ2-150 по ТУ 32.50.50-002-44999832-2022» представлены в Таблице 5.

Таблица 5. Количество используемых излучателей в «Обеззараживателях-очистителях фотокаталитических воздуха Аэролайф КФУ2-150 по ТУ 32.50.50-002-44999832-2022»

№	Модель	Кол-во, шт.	Тип используемых излучателей
1	КФУ2-150х150, размер (Д x Ш x В) 1400 x 310 x 290	2	Actinic BL PL-L 36W/10/4P ICT/25
2	КФУ2-150х150, размер (Д x Ш x В) 1500 x 310 x 290	2	Actinic BL PL-L 36W/10/4P ICT/25
3	КФУ2-150У, размер (Д x Ш x В) 880 x 325 x 355	1	Camelion LH 26 – FS BLB E27 (26 Вт)
4	КФУ2-150х300, размер (Д x Ш x В) 1400 x 290 x 480	4	Actinic BL PL-L 36W/10/4P ICT/25
5	КФУ2-150х300, размер (Д x Ш x В) 1500 x 290 x 480	4	Actinic BL PL-L 36W/10/4P ICT/25
6	КФУ2-150х300, размер (Д x Ш x В) 1400 x 480 x 290	4	Actinic BL PL-L 36W/10/4P ICT/25
7	КФУ2-150х300, размер (Д x Ш x В) 1500 x 480 x 290	4	Actinic BL PL-L 36W/10/4P ICT/25
8	КФУ2-150х300У, размер (Д x Ш x В) 880 x 550 x 355	2	Camelion LH 26 – FS BLB E27 (26 Вт)
9	КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1400 x 290 x 660	6	Actinic BL PL-L 36W/10/4P ICT/25
10	КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1500 x 290 x 660	6	Actinic BL PL-L 36W/10/4P ICT/25
11	КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1400 x 660 x 290	6	Actinic BL PL-L 36W/10/4P ICT/25
12	КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1500 x 660 x 290	6	Actinic BL PL-L 36W/10/4P ICT/25
13	КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1400 x 480 x 480	6	Actinic BL PL-L 36W/10/4P ICT/25
14	КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1500 x 480 x 480	6	Actinic BL PL-L 36W/10/4P ICT/25
15	КФУ2-150х450У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 880 x 790 x 355	3	Camelion LH 26 – FS BLB E27 (26 Вт)
16	КФУ2-150х450У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 880 x 550 x 595	3	Camelion LH 26 – FS BLB E27 (26 Вт)
17	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1400 x 480 x 480	8	Actinic BL PL-L 36W/10/4P ICT/25
		1	ATR UVA 36/40W T8 G13 LEDVANCE
18	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1500 x 480 x 480	8	Actinic BL PL-L 36W/10/4P ICT/25
		1	ATR UVA 36/40W T8 G13 LEDVANCE
19	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1400 x 290 x 880	8	Actinic BL PL-L 36W/10/4P ICT/25
20	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1500 x 290 x 880	8	Actinic BL PL-L 36W/10/4P ICT/25

21	КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1400 х 880 х 290	8	Actinic BL PL-L 36W/10/4P 1CT/25
22	КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1500 х 880 х 290	8	Actinic BL PL-L 36W/10/4P 1CT/25
23	КФУ2-150х600У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 880 х 1030 х 355	4	Camelion LH 26 – FS BLB E27 (26 Вт)
24	КФУ2-150х600У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 880 х 550 х 595	4	Camelion LH 26 – FS BLB E27 (26 Вт)
25	КФУ2-150х600У исп. 3, размер (Д х Ш х В) 970 х 550 х 595	1	ATR UVA 36/40W T8 G13 LEDVANCE
26	КФУ2-150х900, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 660	12	Actinic BL PL-L 36W/10/4P 1CT/25
		2	ATR UVA 36/40W T8 G13 LEDVANCE
27	КФУ2-150х900, размер (Д х Ш х В) 1500 х 480 х 660	12	Actinic BL PL-L 36W/10/4P 1CT/25
		2	ATR UVA 36/40W T8 G13 LEDVANCE
28	КФУ2-150х900, размер (Д х Ш х В) 1400 х 660 х 480	12	Actinic BL PL-L 36W/10/4P 1CT/25
		2	ATR UVA 36/40W T8 G13 LEDVANCE
29	КФУ2-150х900, размер (Д х Ш х В) 1500 х 660 х 480	12	Actinic BL PL-L 36W/10/4P 1CT/25
		2	ATR UVA 36/40W T8 G13 LEDVANCE
30	КФУ2-150х900У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 880 х 790 х 595	6	Camelion LH 26 – FS BLB E27 (26 Вт)
31	КФУ2-150х900У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 970 х 790 х 595	2	ATR UVA 36/40W T8 G13 LEDVANCE
32	КФУ2-150х1000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 490 х 490	1	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		2	Philips TL80W/10R UVA
33	КФУ2-150х1000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 490 х 490	1	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		2	Philips TL80W/10R UVA
34	КФУ2-150х1000У, размер (Д х Ш х В) 1450 х 420 х 420	2	PHILIPS Actinic TL – k 40w/10R
35	КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 490	2	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		4	Philips TL80W/10R UVA
36	КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 490	2	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		4	Philips TL80W/10R UVA
37	КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 490 х 790	2	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		4	Philips TL80W/10R UVA
38	КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 490 х 790	2	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		4	Philips TL80W/10R UVA
39	КФУ2-150х2000У, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 420	4	PHILIPS Actinic TL – k 40w/10R

40	КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 490	3	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		6	Philips TL80W/10R UVA
41	КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 490	3	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		6	Philips TL80W/10R UVA
42	КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 790	3	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		6	Philips TL80W/10R UVA
43	КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 790	3	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		6	Philips TL80W/10R UVA
44	КФУ2-150х3000У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 1450 х 980 х 420	6	PHILIPS Actinic TL – k 40w/10R
45	КФУ2-150х3000У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 710	6	PHILIPS Actinic TL – k 40w/10R
46	КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1350 х 490	4	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		8	Philips TL80W/10R UVA
47	КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1350 х 490	4	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		8	Philips TL80W/10R UVA
48	КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 490 х 1350	4	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		8	Philips TL80W/10R UVA
49	КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 490 х 1350	4	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		8	Philips TL80W/10R UVA
50	КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 790	4	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		8	Philips TL80W/10R UVA
51	КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 790	4	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		8	Philips TL80W/10R UVA
52	КФУ2-150х4000У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 1450 х 1260 х 420	8	PHILIPS Actinic TL – k 40w/10R
53	КФУ2-150х4000У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 710	8	PHILIPS Actinic TL – k 40w/10R
54	КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 790	6	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		12	Philips TL80W/10R UVA
55	КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 790	6	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		12	Philips TL80W/10R UVA
56	КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 1090	6	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		12	Philips TL80W/10R UVA
57	КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 1090	6	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		12	Philips TL80W/10R UVA
58	КФУ2-150х6000У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 1450 х 980 х 710	12	PHILIPS Actinic TL – k 40w/10R
59	КФУ2-150х6000У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 990	12	PHILIPS Actinic TL – k 40w/10R

60	КФУ2-150x8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 1350	8	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		16	Philips TL80W/10R UVA
61	КФУ2-150x8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 1350	8	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		16	Philips TL80W/10R UVA
62	КФУ2-150x8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 790	8	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		16	Philips TL80W/10R UVA
63	КФУ2-150x8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 790	8	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		16	Philips TL80W/10R UVA
64	КФУ2-150x8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1090	8	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		16	Philips TL80W/10R UVA
65	КФУ2-150x8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1090	8	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		16	Philips TL80W/10R UVA
66	КФУ2-150x9000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1090	16	Philips TL80W/10R UVA
		18	Philips TL80W/10R UVA
67	КФУ2-150x9000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1090	16	Philips TL80W/10R UVA
		18	Philips TL80W/10R UVA
68	КФУ2-150x9000У, размер (Д x Ш x В) 1450 x 980 x 990	18	PHILIPS Actinic TL – k 40w/10R
69	КФУ2-150x12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1350	12	ATR ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		24	Philips Philips TL80W/10R UVA
70	КФУ2-150x12000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1350	12	ATR ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		24	Philips Philips TL80W/10R UVA
71	КФУ2-150x12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 1090	12	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		24	Philips TL80W/10R UVA
72	КФУ2-150x12000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 1090	12	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		24	Philips TL80W/10R UVA
73	КФУ2-150x12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1580	12	ATR ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		24	Philips Philips TL80W/10R UVA
74	КФУ2-150x12000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1580	12	ATR ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		24	Philips Philips TL80W/10R UVA
75	КФУ2-150x12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 1090	12	ATR ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		24	Philips Philips TL80W/10R UVA

76	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 1090	12	ATR ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		24	Philips Philips TL80W/10R UVA
77	КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 1580	16	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		32	Philips TL80W/10R UVA
78	КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 1580	16	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		32	Philips TL80W/10R UVA
79	КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 1350	16	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		32	Philips TL80W/10R UVA
80	КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 1350	16	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		32	Philips TL80W/10R UVA
81	КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 1580	16	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		32	Philips TL80W/10R UVA
82	КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 1580	16	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		32	Philips TL80W/10R UVA
83	КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 2180	18	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		36	Philips TL80W/10R UVA
84	КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 2180	18	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		36	Philips TL80W/10R UVA
85	КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 1090	18	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		36	Philips TL80W/10R UVA
86	КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 1090	18	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		36	Philips TL80W/10R UVA
87	КФУ2-150х20000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 1880	20	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		40	Philips TL80W/10R UVA
88	КФУ2-150х20000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 1880	20	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		40	Philips TL80W/10R UVA
89	КФУ2-150х24000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 1580	24	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		48	Philips TL80W/10R UVA
90	КФУ2-150х24000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 1580	24	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		48	Philips TL80W/10R UVA
91	КФУ2-150х24000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 2180	24	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		48	Philips TL80W/10R UVA
92	КФУ2-150х24000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 2180	24	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		48	Philips TL80W/10R UVA
93	КФУ2-150х30000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 1880	30	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		60	Philips TL80W/10R UVA

94	КФУ2-150х30000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 1880	30	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		60	Philips TL80W/10R UVA
95	КФУ2-150х36000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 2180	36	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		72	Philips TL80W/10R UVA
96	КФУ2-150х36000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 2180	36	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
97	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 3160	72	Philips TL80W/10R UVA
		96	Philips TL80W/10R UVA
98	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 3160	72	Philips TL80W/10R UVA
		96	Philips TL80W/10R UVA
99	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2180 x 3160	72	Philips TL80W/10R UVA
		96	Philips TL80W/10R UVA
100	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 2700	48	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		96	Philips TL80W/10R UVA
101	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 2700	48	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		96	Philips TL80W/10R UVA
102	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2180 x 2700	48	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		96	Philips TL80W/10R UVA
103	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2700 x 2180	48	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		96	Philips TL80W/10R UVA
104	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2700 x 2180	48	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		96	Philips TL80W/10R UVA
105	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2700 x 2180	48	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		96	Philips TL80W/10R UVA
106	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2370 x 3270	54	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		108	Philips TL80W/10R UVA
107	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2370 x 3270	54	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		108	Philips TL80W/10R UVA
108	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2370 x 3270	54	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		108	Philips TL80W/10R UVA
109	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2900 x 2370 x 3270	54	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		108	Philips TL80W/10R UVA
110	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 3270 x 2370	54	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		108	Philips TL80W/10R UVA
111	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 3270 x 2370	54	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		108	Philips TL80W/10R UVA
112	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 3270 x 2370	54	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		108	Philips TL80W/10R UVA

113	КФУ2-150x54000, размер (Д x Ш x В) 2900 x 3270 x 2370	54	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		108	Philips TL80W/10R UVA
114	КФУ2-150x72000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 4360	72	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		144	Philips TL80W/10R UVA
115	КФУ2-150x72000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 4360	72	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		144	Philips TL80W/10R UVA
116	КФУ2-150x72000, размер (Д x Ш x В) 3100 x 2180 x 4360	72	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		144	Philips TL80W/10R UVA
117	КФУ2-150x72000, размер (Д x Ш x В) 3500 x 2180 x 4360	72	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		144	Philips TL80W/10R UVA
118	КФУ2-150x81000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 3270 x 3270	81	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		162	Philips TL80W/10R UVA
119	КФУ2-150x81000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 3270 x 3270	81	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		162	Philips TL80W/10R UVA
120	КФУ2-150x81000, размер (Д x Ш x В) 3100 x 3270 x 3270	81	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		162	Philips TL80W/10R UVA
121	КФУ2-150x81000, размер (Д x Ш x В) 3500 x 3270 x 3270	81	ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE
		162	Philips TL80W/10R UVA

** В обеззараживателях могут использоваться либо УФ излучатели, либо светодиодные УФ излучатели. Для всех обеззараживателей один УФ излучатель соответствует одному светодиодному УФ излучателю.*

16.1.10. Технические характеристики светодиодных УФ ламп излучателей LG 3WUV365 используемых в «Обеззараживателях-очистителях фотокаталитических воздуха Аэролайф КФУ2 по ТУ 32.50.50-002-44999832-2022» представлены в Таблице 6.

Таблица 6. Технические характеристики светодиодных УФ излучателей LG 3WUV365

Характеристика	Значение
Рассеиваемая мощность	3 Вт
Прямое напряжение	3,4–3,8 В
Обратное напряжение	5 В
Пиковый прямой ток	700 мА
Интенсивность свечения	3–5 лм
Рабочая температура	от -50°C до + 70°C
Температура хранения	от -50°C до + 70°C
Длина волны	320 до 400 нм

** Возможно использование светодиодных УФ излучателей других марок, но с идентичными техническими характеристиками, с длиной волны в диапазоне 320–400 нм.*

16.1.11. Обеззараживатели должны обеспечивать производительность по воздуху не менее м³/ч, как представлено в Таблице 7.

Таблица 7. Производительность по воздуху «Обеззараживателей-очистителей фотокаталитических воздуха Аэролайф КФУ2-150 по ТУ 32.50.50–002-44999832-2022»

	Модель	Производительность, м ³ /ч
1.	КФУ2-150х150, размер (Д х Ш х В) 1400 х 310 х 290	150
2.	КФУ2-150х150, размер (Д х Ш х В) 1500 х 310 х 290	150
3.	КФУ2-150х150У, размер (Д х Ш х В) 880 х 325 х 355	150
4.	КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1400 х 290 х 480	300
5.	КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1500 х 290 х 480	300
6.	КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 290	300
7.	КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1500 х 480 х 290	300
8.	КФУ2-150х300У, размер (Д х Ш х В) 880 х 550 х 355	300
9.	КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1400 х 290 х 660	450
10.	КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1500 х 290 х 660	450
11.	КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1400 х 660 х 290	450
12.	КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1500 х 660 х 290	450
13.	КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 480	450
14.	КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1500 х 480 х 480	450
15.	КФУ2-150х450У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 880 х 790 х 355	450
16.	КФУ2-150х450У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 880 х 550 х 595	450
17.	КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 480	600
18.	КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1500 х 480 х 480	600
19.	КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1400 х 290 х 880	600
20.	КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1500 х 290 х 880	600
21.	КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1400 х 880 х 290	600
22.	КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1500 х 880 х 290	600
23.	КФУ2-150х600У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 880 х 1030 х 355	600
24.	КФУ2-150х600У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 880 х 550 х 595	600
25.	КФУ2-150х600У исп. 3, размер (Д х Ш х В) 970 х 550 х 595	600
26.	КФУ2-150х900, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 660	900

27.	КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1500 x 480 x 660	900
28.	КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1400 x 660 x 480	900
29.	КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1500 x 660 x 480	900
30.	КФУ2-150Х900У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 880 x 790 x 595	900
31.	КФУ2-150Х900У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 970 x 790 x 595	900
32.	КФУ2-150х1000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 490 x 490	1000
33.	КФУ2-150х1000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 490 x 490	1000
34.	КФУ2-150х1000У, размер (Д x Ш x В) 1450 x 420 x 420	1000
35.	КФУ2-150х2000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 490	2000
36.	КФУ2-150х2000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 490	2000
37.	КФУ2-150х2000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 490 x 790	2000
38.	КФУ2-150х2000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 490 x 790	2000
39.	КФУ2-150х2000У, размер (Д x Ш x В) 1450 x 700 x 420	2000
40.	КФУ2-150х3000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 490	3000
41.	КФУ2-150х3000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 490	3000
42.	КФУ2-150х3000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 790	3000
43.	КФУ2-150х3000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 790	3000
44.	КФУ2-150х3000У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 1450 x 980 x 420	3000
45.	КФУ2-150х3000У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 1450 x 700 x 710	3000
46.	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 490	4000
47.	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 490	4000
48.	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 490 x 1350	4000
49.	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 490 x 1350	4000
50.	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 790	4000
51.	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 790	4000
52.	КФУ2-150х4000У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 1450 x 1260 x 420	4000
53.	КФУ2-150х4000У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 1450 x 700 x 710	4000
54.	КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 790	6000
55.	КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 790	6000
56.	КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 1090	6000
57.	КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 1090	6000

58.	КФУ2-150х6000У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 1450 х 980 х 710	6000
59.	КФУ2-150х6000У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 990	6000
60.	КФУ2-150х8000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 1350	8000
61.	КФУ2-150х8000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 1350	8000
62.	КФУ2-150х8000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1350 х 790	8000
63.	КФУ2-150х8000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1350 х 790	8000
64.	КФУ2-150х8000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 1090	8000
65.	КФУ2-150х8000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 1090	8000
66.	КФУ2-150х9000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 1090	9000
67.	КФУ2-150х9000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 1090	9000
68.	КФУ2-150х9000У, размер (Д х Ш х В) 1450 х 980 х 990	9000
69.	КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 1350	12000
70.	КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 1350	12000
71.	КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1350 х 1090	12000
72.	КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1350 х 1090	12000
73.	КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 1350	12000
74.	КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 1350	12000
75.	КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 1090	12000
76.	КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 1090	12000
77.	КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 1580	16000
78.	КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 1580	16000
79.	КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1350 х 1580	16000
80.	КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1350 х 1580	16000
81.	КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 1350	16000
82.	КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 1350	16000
83.	КФУ2-150х18000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 2180	18000
84.	КФУ2-150х18000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 2180	18000
85.	КФУ2-150х18000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 1090	18000
86.	КФУ2-150х18000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 1090	18000
87.	КФУ2-150х20000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 1880	20000
88.	КФУ2-150х20000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 1880	20000

89.	КФУ2-150х24000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 1580	24000
90.	КФУ2-150х24000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 1580	24000
91.	КФУ2-150х24000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 2180	24000
92.	КФУ2-150х24000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 2180	24000
93.	КФУ2-150х30000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 1880	30000
94.	КФУ2-150х30000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 1880	30000
95.	КФУ2-150х36000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 2180	36000
96.	КФУ2-150х36000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 2180	36000
97.	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 3160	48000
98.	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 3160	48000
99.	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2180 x 3160	48000
100.	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 2700	48000
101.	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 2700	48000
102.	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2180 x 2700	48000
103.	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2700 x 2180	48000
104.	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2700 x 2180	48000
105.	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2700 x 2180	48000
106.	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2370 x 3270	54000
107.	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2370 x 3270	54000
108.	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2370 x 3270	54000
109.	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2900 x 2370 x 3270	54000
110.	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 3270 x 2370	54000
111.	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 3270 x 2370	54000
112.	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 3270 x 2370	54000
113.	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2900 x 3270 x 2370	54000
114.	КФУ2-150х72000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 4360	72000
115.	КФУ2-150х72000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 4360	72000
116.	КФУ2-150х72000, размер (Д x Ш x В) 3100 x 2180 x 4360	72000
117.	КФУ2-150х72000, размер (Д x Ш x В) 3500 x 2180 x 4360	72000
118.	КФУ2-150х81000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 3270 x 3270	81000
119.	КФУ2-150х81000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 3270 x 3270	81000

120.	КФУ2-150х81000, размер (Д х Ш х В) 3100 х 3270 х 3270	81000
121.	КФУ2-150х81000, размер (Д х Ш х В) 3500 х 3270 х 3270	81000

**Допускается кратковременное превышение расхода воздуха через систему очистки воздуха, но не более 10% от номинального.*

16.1.12. Обеззараживатели должны иметь время выхода на заданный режим не более 10 с.

16.1.13. Обеззараживатели могут работать в непрерывном режиме неограниченное время. МИ классифицируется как для продолжительного режима работы.

16.1.14. Обеззараживатели должны иметь фотокаталитический и адсорбционно-каталитический блок.

16.1.15. Обеззараживатели оборудованы барьерным электростатическим НЕРА фильтром, который обеспечивает фильтрацию пылевых частиц по классу E11–H14 (по ГОСТ Р ЕН 1822-2, ГОСТ Р ЕН 1822-3, ГОСТ Р ЕН 1822-4).

16.1.16. Обеззараживатели с производительностью менее 6000 м³/ч должны быть подключены к питанию 220 В, допускаемое отклонение напряжения ± 22 В и частотой 50 Гц с допускаемым отклонением ± 1 Гц. Обеззараживатели с производительностью 6000 м³/ч и более должны быть подключены к питанию 380В, допускаемое отклонение напряжения ± 10 % В и частотой 50 Гц с допускаемым отклонением ± 1 Гц.

16.1.17. Потребляемая мощность должна соответствовать Таблице 8.

Таблица 8. Потребляемая мощность «Обеззараживателями-очистителями фотокаталитическими воздуха Аэролайф КФУ2-150 по ТУ 32.50.50–002-44999832-2022», не более, Вт.

	Модель	Мощность, Вт	
		УФ-излучатели ($\pm 15\%$)	Светодиодные УФ-излучатели ($\pm 15\%$)
1.	КФУ2-150х150, размер (Д х Ш х В) 1400 х 310 х 290	122 (Actinic BL PL-L 36W/10/4P ICT/25)	86
2.	КФУ2-150х150, размер (Д х Ш х В) 1500 х 310 х 290	122 (Actinic BL PL-L 36W/10/4P ICT/25)	86
3.	КФУ2-150х150У, размер (Д х Ш х В) 880 х 325 х 355	76 (Camelion LH 26 – FS BLB E27 (26 Вт))	86
4.	КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1400 х 290 х 480	194 (Actinic BL PL-L 36W/10/4P ICT/25)	122
5.	КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1500 х 290 х 480	194 (Actinic BL PL-L 36W/10/4P ICT/25)	122
6.	КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 290	194 (Actinic BL PL-L 36W/10/4P ICT/25)	122
7.	КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1500 х 480 х 290	194 (Actinic BL PL-L 36W/10/4P ICT/25)	122

8.	КФУ2-150х300У, размер (Д x Ш x В) 880 x 550 x 355	102 (Camelion LH 26 – FS BLB E27 (26 Вт))	122
9.	КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1400 x 290 x 660	266 (Actinic BL PL-L 36W/10/4P 1CT/25)	158
10.	КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1500 x 290 x 660	266 (Actinic BL PL-L 36W/10/4P 1CT/25)	158
11.	КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1400 x 660 x 290	266 (Actinic BL PL-L 36W/10/4P 1CT/25)	158
12.	КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1500 x 660 x 290	266 (Actinic BL PL-L 36W/10/4P 1CT/25)	158
13.	КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1400 x 480 x 480	266 (Actinic BL PL-L 36W/10/4P 1CT/25)	158
14.	КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1500 x 480 x 480	266 (Actinic BL PL-L 36W/10/4P 1CT/25)	158
15.	КФУ2-150х450У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 880 x 790 x 355	128 (Camelion LH 26 – FS BLB E27 (26 Вт))	158
16.	КФУ2-150х450У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 880 x 550 x 595	128 (Camelion LH 26 – FS BLB E27 (26 Вт))	158
17.	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1400 x 480 x 480	338 (Actinic BL PL-L 36W/10/4P 1CT/25) 90 (ATR UVA 36/40W T8 G13 LEDVANCE)	194
18.	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1500 x 480 x 480	338 (Actinic BL PL-L 36W/10/4P 1CT/25) 90 (ATR UVA 36/40W T8 G13 LEDVANCE)	194
19.	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1400 x 290 x 880	338 (Actinic BL PL-L 36W/10/4P 1CT/25)	194
20.	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1500 x 290 x 880	338 (Actinic BL PL-L 36W/10/4P 1CT/25)	194
21.	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1400 x 880 x 290	338 (Actinic BL PL-L 36W/10/4P 1CT/25)	194
22.	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1500 x 880 x 290	338 (Actinic BL PL-L 36W/10/4P 1CT/25)	194
23.	КФУ2-150х600У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 880 x 1030 x 355	154 (Camelion LH 26 – FS BLB E27 (26 Вт))	194
24.	КФУ2-150х600У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 880 x 550 x 595	154 (Camelion LH 26 – FS BLB E27 (26 Вт))	194
25.	КФУ2-150х600У исп. 3, размер (Д x Ш x В) 970 x 550 x 595	90 (ATR UVA 36/40W T8 G13 LEDVANCE)	194
26.	КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1400 x 480 x 660	482 (Actinic BL PL-L 36W/10/4P 1CT/25) 130 (ATR UVA 36/40W T8 G13 LEDVANCE)	266
27.	КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1500 x 480 x 660	482 (Actinic BL PL-L 36W/10/4P 1CT/25)	266

		130 (ATR UVA 36/40W T8 G13 LEDVANCE)	
28.	КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1400 x 660 x 480	482 (Actinic BL PL-L 36W/10/4P 1CT/25)	266
29.	КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1500 x 660 x 480	482 (Actinic BL PL-L 36W/10/4P 1CT/25) 130 (ATR UVA 36/40W T8 G13 LEDVANCE)	266
30.	КФУ2-150х900У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 880 x 790 x 595	206 (Camelion LH 26 – FS BLB E27 (26 Вт))	266
31.	КФУ2-150х900У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 970 x 790 x 595	130 (ATR UVA 36/40W T8 G13 LEDVANCE)	266
32.	КФУ2-150х1000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 490 x 490	125 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE) 210 (Philips TL80W/10R UVA)	122
33.	КФУ2-150х1000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 490 x 490	125 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE) 210 (Philips TL80W/10R UVA)	122
34.	КФУ2-150х1000У, размер (Д x Ш x В) 1450 x 420 x 420	90 (Philips Actinic TL – k 40w/10R)	120
35.	КФУ2-150х2000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 490	200 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE) 370 (Philips TL80W/10R UVA)	158
36.	КФУ2-150х2000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 490	200 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE) 370 (Philips TL80W/10R UVA)	158
37.	КФУ2-150х2000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 490 x 790	200 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE) 370 (Philips TL80W/10R UVA)	158
38.	КФУ2-150х2000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 490 x 790	200 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE) 370 (Philips TL80W/10R UVA)	158
39.	КФУ2-150х2000У, размер (Д x Ш x В) 1450 x 700 x 420	130 (Philips Actinic TL – k 40w/10R)	158
40.	КФУ2-150х3000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 490	275 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE) 530 (Philips TL80W/10R UVA)	212

41.	КФУ2-150х3000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 490	275 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	212
		530 (Philips TL80W/10R UVA)	
42.	КФУ2-150х3000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 790	275 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	212
		530 (Philips TL80W/10R UVA)	
43.	КФУ2-150х3000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 790	275 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	212
		530 (Philips TL80W/10R UVA)	
44.	КФУ2-150х3000У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 1450 x 980 x 420	150 (Philips Actinic TL – k 40w/10R)	212
45.	КФУ2-150х3000У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 1450 x 700 x 710	150 (Philips Actinic TL – k 40w/10R)	212
46.	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 490	350 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	266
		690 (Philips TL80W/10R UVA)	
47.	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 490	350 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	266
		690 (Philips TL80W/10R UVA)	
48.	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 490 x 1350	350 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	266
		690 (Philips TL80W/10R UVA)	
49.	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 490 x 1350	350 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	266
		690 (Philips TL80W/10R UVA)	
50.	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 790	350 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	266
		690 (Philips TL80W/10R UVA)	
51.	КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 790	350 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	266
		690 (Philips TL80W/10R UVA)	
52.	КФУ2-150х4000У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 1450 x 1260 x 420	210 (Philips Actinic TL – k 40w/10R)	266
53.	КФУ2-150х4000У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 1450 x 700 x 710	210 (Philips Actinic TL – k 40w/10R)	266

54.	КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 790	500 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	374
		1010 (Philips TL80W/10R UVA)	
55.	КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 790	500 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	374
		1010 (Philips TL80W/10R UVA)	
56.	КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 1090	500 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	374
		1010 (Philips TL80W/10R UVA)	
57.	КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 1090	500 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	374
		1010 (Philips TL80W/10R UVA)	
58.	КФУ2-150х6000У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 1450 x 980 x 710	290 (Philips Actinic TL – k 40w/10R)	374
59.	КФУ2-150х6000У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 1450 x 700 x 990	290 (Philips Actinic TL – k 40w/10R)	374
60.	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 1350	650 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	482
		1330 (Philips TL80W/10R UVA)	
61.	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 1350	650 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	482
		1330 (Philips TL80W/10R UVA)	
62.	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 790	650 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	482
		1330 (Philips TL80W/10R UVA)	
63.	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 790	650 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	482
		1330 (Philips TL80W/10R UVA)	
64.	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1090	650 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	482
		1330 (Philips TL80W/10R UVA)	
65.	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1090	650 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	482
		1330 (Philips TL80W/10R UVA)	

66.	КФУ2-150х9000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1090	725 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	536
		1490 (Philips TL80W/10R UVA)	
67.	КФУ2-150х9000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1090	725 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	536
		1490 (Philips TL80W/10R UVA)	
68.	КФУ2-150х9000У, размер (Д x Ш x В) 1450 x 980 x 990	410 (Philips Actinic TL – k 40w/10R)	536
69.	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1350	950 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	698
		1970 (Philips TL80W/10R UVA)	
70.	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1350	950 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	698
		1970 (Philips TL80W/10R UVA)	
71.	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 1090	950 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	698
		1970 (Philips TL80W/10R UVA)	
72.	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 1090	950 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	698
		1970 (Philips TL80W/10R UVA)	
73.	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1580	950 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	698
		1970 (Philips TL80W/10R UVA)	
74.	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1580	950 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	698
		1970 (Philips TL80W/10R UVA)	
75.	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 1090	1000 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	698
		2020 (Philips TL80W/10R UVA)	
76.	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 1090	1000 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	698
		2020 (Philips TL80W/10R UVA)	
77.	КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 1580	1400 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	914
		2760 (Philips TL80W/10R UVA)	

78.	КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 1580	1400 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	914
		2760 (Philips TL80W/10R UVA)	
79.	КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 1350	1300 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	914
		2660 (Philips TL80W/10R UVA)	
80.	КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 1350	1300 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	914
		2660 (Philips TL80W/10R UVA)	
81.	КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 1580	1300 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	914
		2660 (Philips TL80W/10R UVA)	
82.	КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 1580	1300 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	914
		2660 (Philips TL80W/10R UVA)	
83.	КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 2180	1450 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	1022
		2980 (Philips TL80W/10R UVA)	
84.	КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 2180	1450 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	1022
		2980 (Philips TL80W/10R UVA)	
85.	КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 1090	1450 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	1022
		2980 (Philips TL80W/10R UVA)	
86.	КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 1090	1450 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	1022
		2980 (Philips TL80W/10R UVA)	
87.	КФУ2-150х20000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 1880	1700 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	1130
		3400 (Philips TL80W/10R UVA)	
88.	КФУ2-150х20000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 1880	1700 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	1130
		3400 (Philips TL80W/10R UVA)	

89.	КФУ2-150х24000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 1580	2000 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	1390
		4040 (Philips TL80W/10R UVA)	
90.	КФУ2-150х24000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 1580	2000 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	1390
		4040 (Philips TL80W/10R UVA)	
91.	КФУ2-150х24000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 2180	2000 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	1390
		4040 (Philips TL80W/10R UVA)	
92.	КФУ2-150х24000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 2180	2000 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	1390
		4040 (Philips TL80W/10R UVA)	
93.	КФУ2-150х30000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 1880	2450 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	1720
		5000 (Philips TL80W/10R UVA)	
94.	КФУ2-150х30000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 1880	2450 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	1720
		5000 (Philips TL80W/10R UVA)	
95.	КФУ2-150х36000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 2180	2900 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	2040
		5960 (Philips TL80W/10R UVA)	
96.	КФУ2-150х36000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 2180	2900 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	2040
		5960 (Philips TL80W/10R UVA)	
97.	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 3160	4000 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	2700
		8080 (Philips TL80W/10R UVA)	
98.	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 3160	4000 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	2700
		8080 (Philips TL80W/10R UVA)	
99.	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2180 x 3160	4000 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	2700
		8080 (Philips TL80W/10R UVA)	

100.	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 2700	3800 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	2700
		7880 (Philips TL80W/10R UVA)	
101.	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 2700	3800 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	2700
		7880 (Philips TL80W/10R UVA)	
102.	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2180 x 2700	3800 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	2700
		7880 (Philips TL80W/10R UVA)	
103.	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2700 x 2180	3800 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	2700
		7880 (Philips TL80W/10R UVA)	
104.	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2700 x 2180	3800 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	2700
		7880 (Philips TL80W/10R UVA)	
105.	КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2700 x 2180	3800 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	2700
		7880 (Philips TL80W/10R UVA)	
106.	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2370 x 3270	4500 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	3116
		9090 (Philips TL80W/10R UVA)	
107.	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2370 x 3270	4500 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	3116
		9090 (Philips TL80W/10R UVA)	
108.	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2370 x 3270	4500 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	3116
		9090 (Philips TL80W/10R UVA)	
109.	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2900 x 2370 x 3270	4500 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	3116
		9090 (Philips TL80W/10R UVA)	
110.	КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 3270 x 2370	4500 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	3116
		9090 (Philips TL80W/10R UVA)	

111.	КФУ2-150x54000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 3270 x 2370	4500 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	3116
		9090 (Philips TL80W/10R UVA)	
112.	КФУ2-150x54000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 3270 x 2370	4500 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	3116
		9090 (Philips TL80W/10R UVA)	
113.	КФУ2-150x54000, размер (Д x Ш x В) 2900 x 3270 x 2370	4500 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	3116
		9090 (Philips TL80W/10R UVA)	
114.	КФУ2-150x72000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 4360	5800 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	4088
		11920 (Philips TL80W/10R UVA)	
115.	КФУ2-150x72000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 4360	5800 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	4088
		11920 (Philips TL80W/10R UVA)	
116.	КФУ2-150x72000, размер (Д x Ш x В) 3100 x 2180 x 4360	5800 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	4088
		11920 (Philips TL80W/10R UVA)	
117.	КФУ2-150x72000, размер (Д x Ш x В) 3500 x 2180 x 4360	5800 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	4088
		11920 (Philips TL80W/10R UVA)	
118.	КФУ2-150x81000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 3270 x 3270	6525 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	4674
		13410 (Philips TL80W/10R UVA)	
119.	КФУ2-150x81000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 3270 x 3270	6525 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	4674
		13410 (Philips TL80W/10R UVA)	
120.	КФУ2-150x81000, размер (Д x Ш x В) 3100 x 3270 x 3270	6525 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	4674
		13410 (Philips TL80W/10R UVA)	
121.	КФУ2-150x81000, размер (Д x Ш x В) 3500 x 3270 x 3270	6525 (ATR UVA 75W T8 G13 LEDVANCE)	4674
		13410 (Philips TL80W/10R UVA)	

- 16.1.18. Мощность блока зарядки аэрозолей должна составлять не более 50 Вт.
- 16.1.19. Обеззараживатели могут комплектоваться опорами (подвесами), для монтажа на объекте на высоте.
- 16.1.20. Обеззараживатели должны иметь минимальное время наработку на отказ не менее 10000 часов.
- 16.1.21. Обеззараживатели должны иметь средний срок службы до списания не менее 10 лет, при интенсивности эксплуатации 9 часов в сутки. Предельное состояние — состояние, при котором стоимость восстановления экономически нецелесообразна.
- 16.1.22. На наружной поверхности обеззараживателей не должно быть трещин, царапин, пористости, расслоений и других дефектов.
- 16.1.23. По электробезопасности обеззараживатели должны соответствовать требованиям к классу I без рабочей части по ГОСТ Р МЭК 60601-1.
- 16.1.24. Обеззараживатели должны соответствовать требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2.
- 16.1.25. Сопротивление по воздушному потоку — $160 / 250 \pm 15 \%$ Па при номинальном расходе воздуха
- 16.1.26. Обеззараживатели должны иметь уровень звуковой мощности не более 50 дБА.
- 16.1.27. Наружные поверхности обеззараживателей должны быть устойчивы к многократной дезинфекции по МУ-287-11 раствором, содержащим 3 % перекись водорода и 0,5 % моющего средства. Для снижения коррозионного действия моющих растворов рекомендуется использовать ингибитор коррозии — 0,14 % олеата натрия.
- 16.1.28. Обеззараживатели при эксплуатации должны быть устойчиво к воздействию климатических факторов для вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.
- 16.1.29. При транспортировке и хранении обеззараживатели, упакованные в соответствии с требованиями настоящих ТУ, должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов, для условий хранения 5 по ГОСТ 15150.
- 16.1.30. Обеззараживатели упакованные в соответствии с требованиями настоящих ТУ, при транспортировании должны быть устойчивы к механическим воздействиям при транспортировании в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444.
- 16.1.31. Обеззараживатели должны обеспечивать близкую к 99 % инактивацию всех задержанных микроорганизмов.
- 16.1.32. Эффективность очистки воздуха должна соответствовать требованиям Таблицы 9.

Таблица 9. Эффективность очистки воздуха «Обеззараживателями-очистителями фотокаталитическими воздуха Аэролайф КФУ2-150 по ТУ 32.50.50-002-44999832-2022»

Характеристика	Значение
Эффективность фильтрации	E11-H14
Эффективность обеззараживания	95 % — 99,995 %

16.1.33. Монтаж электрической цепи обеззараживателей должен быть выполнен в соответствии с РДТ 25 106 или с ГОСТ Р МЭК 60601-1 согласно требованиям монтажного чертежа, на электрическую часть обеззараживателей.

16.1.34. Металлические и неметаллические неорганические покрытия должны быть выполнены по ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации 1 по ГОСТ 15150.

17. Размещение МИ

Размещение МИ «Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2- 150 по ТУ 32.50.50-002-44999832-2022» представлено на Рисунке 4.

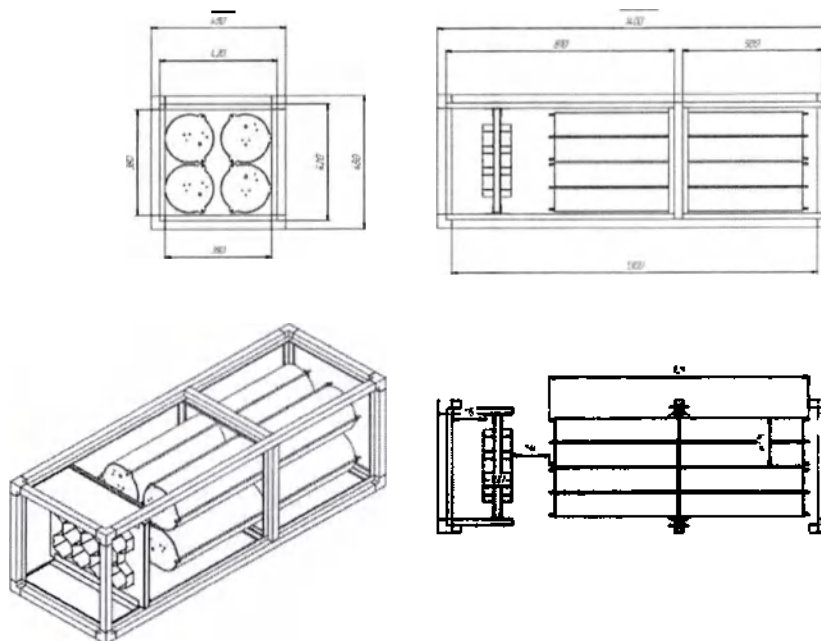


Рис. 4. Вентиляционное размещение

18. Требования по технике безопасности при работе с изделием

Подключение и запуск обеззараживателя должен производиться квалифицированным персоналом в условиях, отвечающих действующим нормам.

Работник, включающий обеззараживатель, обязан предварительно принять меры по прекращению всех работ на данном изделии (ремонт, очистка и др.) и оповестить персонал о пуске.

Заземление должно быть организовано в соответствии с «Правилами устройства электроустановок». Значение сопротивления между заземляющим выводом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью обеззараживателя, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,05 Ом (ПТЭ ЭП).

При работах, связанных с опасностью поражения электрическим током (в том числе статическим электричеством), следует применять защитные средства.

Работы с высоковольтными блоками разрешается проводить не ранее чем через 5 минут после отключения обеззараживателя от электрической сети.

Запрещено включать напряжение сети до подключения обеззараживателя ко всем предохранителям (автоматам).

Запрещаются ремонтные и наладочные работы без предварительного выключения питания обеззараживателя.

Работа обеззараживателя при открытых сервисных панелях запрещена.

Место расположения обеззараживателя должно быть оснащено необходимым защитным оборудованием, обеспечивающим безопасное обслуживание, а также всеми противопожарными средствами согласно местным действующим нормам и требованиям.

Обеззараживатель необходимо беречь от резких толчков и ударов способных повредить источник УФ-излучения и фотокаталитические фильтры. При выявлении неисправности оборудования необходимо обратиться в сервисный центр.

При появлении признаков неполадок (например, запаха гари) выключите обеззараживатель, за дальнейшими рекомендациями обращайтесь в сервисный центр. Ремонт обеззараживателя может производиться только сертифицированными специалистами.

Перед первым включением обеззараживателя в сеть необходимо убедиться, что он прогрет до комнатной температуры и на нем нет образования конденсата, в случае транспортировки обеззараживателя при отрицательной температуре, необходимо выдержать обеззараживатель в помещении не менее 3 часов.

Фильтры подлежат замене по мере их загрязнения, но не реже 1 раза в год несвоевременная их замена может привести к перегреву обеззараживателя и выходу его из строя, а также к снижению эффективности очистки и обеззараживания воздуха.

Каждый случай технической неисправности или нарушения режима работы обеззараживателя и должен быть зафиксирован в журнале движения и консервации изделия в процессе эксплуатации и приняты меры по приведению обеззараживателя в исправное состояние

При включении обеззараживателя после длительных перерывов в работе возможно появление «кисловатого» привкуса очищаемого воздуха. Это связано с адсорбцией газов на поверхности фотокатализатора в отсутствии УФ-излучения. После непродолжительной работы происходит самоочистка фотокатализатора и это явление исчезает.

19. Управление работой

Перед первым включением в сеть изделия необходимо убедиться, что оно прогрето до комнатной температуры и на нём нет образования конденсата. Прибор рассчитан на питание от сети 220/380 В/50 Гц. Включение производится нажатием кнопки (автомата, пульта дистанционного управления). Рабочее положение воздухоочистителя потолочное. Время непрерывной работы прибора не ограничено.

20. Комплект поставки

Комплект поставки обеззараживателей должен соответствовать указанному в Таблице 10.

Комплектность поставки установки определяется условиями договора поставки.

Таблица 10. Комплект поставки «Обеззараживателей-очистителей фотокаталитических воздуха Аэролайф КФУ2-150 по ТУ 32.50.50-002-44999832-2022»

	Наименование	Количество, шт.
1.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х150, размер (Д х Ш х В) 1400 х 310 х 290, в составе:	
	КФУ2-150х150, размер (Д х Ш х В) 1400 х 310 х 290	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
2.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х150, размер (Д х Ш х В) 1500 х 310 х 290, в составе:	
	КФУ2-150х150, размер (Д х Ш х В) 1500 х 310 х 290	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
3.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х150У, размер (Д х Ш х В) 880 х 325 х 355, в составе:	
	КФУ2-150х150У, размер (Д х Ш х В) 880 х 325 х 355	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
4.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1400 х 290 х 480, в составе:	
	КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1400 х 290 х 480	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
5.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1500 х 290 х 480, в составе:	
	КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1500 х 290 х 480	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
6.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 290, в составе:	
	КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 290	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
7.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1500 х 480 х 290, в составе:	
	КФУ2-150х300, размер (Д х Ш х В) 1500 х 480 х 290	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
8.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х300У, размер (Д х Ш х В) 880 х 550 х 355, в составе:	
	КФУ2-150х300У, размер (Д х Ш х В) 880 х 550 х 355	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
9.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1400 х 290 х 660, в составе:	
	КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1400 х 290 х 660	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1

10.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1400 х 290 х 660, в составе:	
	КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1500 х 290 х 660	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
11.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1400 х 660 х 290, в составе:	
	КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1400 х 660 х 290	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
12.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1500 х 660 х 290, в составе:	
	КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1500 х 660 х 290	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
13.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 480, в составе:	
	КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 480	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
14.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1500 х 480 х 480, в составе:	
	КФУ2-150х450, размер (Д х Ш х В) 1500 х 480 х 480	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
15.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 880 х 790 х 355, в составе:	
	КФУ2-150х450У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 880 х 790 х 355	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
16.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 880 х 550 х 595, в составе:	
	КФУ2-150х450У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 880 х 550 х 595	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
17.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 480, в составе:	
	КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1400 х 480 х 480	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
18.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1500 х 480 х 480, в составе:	
	КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1500 х 480 х 480	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
19.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1400 х 290 х 880, в составе:	
	КФУ2-150х600, размер (Д х Ш х В) 1400 х 290 х 880	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1

20.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1500 x 290 x 880, в составе:	
	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1500 x 290 x 880	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
21.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1400 x 880 x 290, в составе:	
	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1400 x 880 x 290	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
22.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1500 x 880 x 290, в составе:	
	КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1500 x 880 x 290	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
23.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 880 x 1030 x 355, в составе:	
	КФУ2-150х600У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 880 x 1030 x 355	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
24.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 880 x 550 x 595, в составе:	
	КФУ2-150х600У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 880 x 550 x 595	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
25.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600У исп. 3, размер (Д x Ш x В) 970 x 550 x 595, в составе:	
	КФУ2-150х600У исп. 3, размер (Д x Ш x В) 970 x 550 x 595	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
26.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1400 x 480 x 660, в составе:	
	КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1400 x 480 x 660	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
27.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1500 x 480 x 660, в составе:	
	КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1500 x 480 x 660	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
28.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1400 x 660 x 480, в составе:	
	КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1400 x 660 x 480	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
29.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1500 x 660 x 480, в составе:	
	КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1500 x 660 x 480	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1

30.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х900У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 880 х 790 х 595, в составе:	
	КФУ2-150х900У, размер (Д х Ш х В) 880 х 790 х 595	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
31.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х900У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 970 х 790 х 595, в составе:	
	КФУ2-150х900У, размер (Д х Ш х В) 970 х 790 х 595	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
32.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х1000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 490 х 490, в составе:	
	КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 490 х 490	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
33.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х1000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 490 х 490, в составе:	
	КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 490х490	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
34.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х1000У, размер (Д х Ш х В) 1450 х 420 х 420, в составе:	
	КФУ2-150х1000У, размер (Д х Ш х В) 1450 х 420 х 420	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
35.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 490, в составе:	
	КФУ2-150х 2000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 490	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
36.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 490, в составе:	
	КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 490	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
37.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 490 х 790, в составе:	
	КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 490 х 790	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
38.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 490 х 790, в составе:	
	КФУ2-150х2000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 490 х 790	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
39.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х2000У, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 420, в составе:	
	КФУ2-150х2000У, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 420	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1

40.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 490, в составе:	
	КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 490	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
41.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 490, в составе:	
	КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 490	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
42.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 790, в составе:	
	КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 790	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
43.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 790, в составе:	
	КФУ2-150х3000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 790	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
44.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х3000У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 1450 х 980 х 420, в составе:	
	КФУ2-150х3000У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 1450 х 980 х 420	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
45.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х3000У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 710, в составе:	
	КФУ2-150х3000У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 710	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
46.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1350 х 490, в составе:	
	КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1350 х 490	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
47.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2400 х 1350 х 490, в составе:	
	КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1350 х 490	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
48.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 490 х 1350, в составе:	
	КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 490 х 1350	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
49.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 490 х 1350, в составе:	
	КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 490 х 1350	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1

50.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 790, в составе:	
	КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 790	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
51.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 790, в составе:	
	КФУ2-150х4000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 790	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
52.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х4000У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 1450 х 1260 х 420, в составе:	
	КФУ2-150х4000У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 1450 х 1260 х 420	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
53.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х4000У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 710, в составе:	
	КФУ2-150х4000У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 710	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
54.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 790, в составе:	
	КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 790	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
55.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 790, в составе:	
	КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 790	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
56.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 1090, в составе:	
	КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 790 х 1090	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
57.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 1090, в составе:	
	КФУ2-150х6000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 790 х 1090	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
58.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х6000У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 1450 х 980 х 710, в составе:	
	КФУ2-150х6000У исп. 1, размер (Д х Ш х В) 1450 х 980 х 710	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
59.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х6000У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 990, в составе:	
	КФУ2-150х6000У исп. 2, размер (Д х Ш х В) 1450 х 700 х 990	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1

60.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 1350, в составе:	
	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 1350	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
61.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 1350, в составе:	
	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 1350	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
62.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 790, в составе:	
	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 790	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
63.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 790, в составе:	
	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 790	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
64.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1090, в составе:	
	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1090	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
65.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1090, в составе:	
	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1090	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
66.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х9000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1090, в составе:	
	КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1090	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
67.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х9000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1090, в составе:	
	КФУ2-150х9000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1090	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
68.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х9000У, размер (Д x Ш x В) 1450 x 980 x 990, в составе:	
	КФУ2-150х9000У, размер (Д x Ш x В) 1450 x 980 x 990	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
69.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1350, в составе:	
	КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1350	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1

70.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 1350, в составе:	
	КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 1350	1
	Предфильтр воздушный ФВК (при необходимости)	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
71.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1350 х 1090, в составе:	
	КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1350 х 1090	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
72.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1350 х 1090, в составе:	
	КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1350 х 1090	1
	Предфильтр воздушный ФВК	1 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
73.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 1580, в составе:	
	КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1090 х 1580	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
74.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 1580, в составе:	
	КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1090 х 1580	1
	Предфильтр воздушный ФВК	2 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
75.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 1090, в составе:	
	КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 1090	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
76.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 1090, в составе:	
	КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 1090	1
	Предфильтр воздушный ФВК	2 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
77.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 1580, в составе:	
	КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 1580	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
78.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 1580, в составе:	
	КФУ2-150х12000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 1580	1
	Предфильтр воздушный ФВК	4 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
79.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 1350, в составе:	
	КФУ2-150х16000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 1350	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1

80.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 1350, в составе:	
	КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 1350	1
	Предфильтр воздушный ФВК	2 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
81.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 1580, в составе:	
	КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 1580	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
82.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 1580, в составе:	
	КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 1580	1
	Предфильтр воздушный ФВК	2 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
83.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 2180, в составе:	
	КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 2180	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
84.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 2180, в составе:	
	КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 2180	1
	Предфильтр воздушный ФВК	2 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
85.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 1090, в составе:	
	КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 1090	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
86.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 1090, в составе:	
	КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 1090	1
	Предфильтр воздушный ФВК	2 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
87.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х20000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 1880, в составе:	
	КФУ2-150х20000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 1880	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
88.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х20000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 1880, в составе:	
	КФУ2-150х20000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 1880	1
	Предфильтр воздушный ФВК	4 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
89.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х24000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 1580, в составе:	
	КФУ2-150х24000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 1580	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1

90.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х24000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 2180, в составе:	
	КФУ2-150х24000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 2180	1
	Предфильтр воздушный ФВК	4 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
91.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х24000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580 х 2180, в составе:	
	КФУ2-150х24000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 1580х218	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
92.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х24000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580 х 2180, в составе:	
	КФУ2-150х24000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 1580х218	1
	Предфильтр воздушный ФВК	4 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
93.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х30000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 1880, в составе:	
	КФУ2-150х30000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 1880	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
94.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х30000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 1880, в составе:	
	КФУ2-150х30000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 1880	1
	Предфильтр воздушный ФВК	4 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
95.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х36000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 2180, в составе:	
	КФУ2-150х36000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 2180	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
96.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х36000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 2180, в составе:	
	КФУ2-150х36000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 2180	1
	Предфильтр воздушный ФВК	4 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
97.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 3160, в составе:	
	КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 3160	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
98.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 3160, в составе:	
	КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 3160	1
	Предфильтр воздушный ФВК	8 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
99.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2500 х 2180 х 3160, в составе:	
	КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2500 х 2180 х 3160	1
	Предфильтр воздушный ФВК	8 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1

100.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 2700, в составе:	
	КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 2700	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
101.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 2700, в составе:	
	КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 2700	1
	Предфильтр воздушный ФВК	4 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
102.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2500 х 2180 х 2700, в составе:	
	КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2500 х 2180 х 2700	1
	Предфильтр воздушный ФВК	4 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
103.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2700 х 2180, в составе:	
	КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2700 х 2180	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
104.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2700 х 2180, в составе:	
	КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2700 х 2180	1
	Предфильтр воздушный ФВК	4 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
105.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2500 х 2700 х 2180, в составе:	
	КФУ2-150х48000, размер (Д х Ш х В) 2500 х 2700 х 2180	1
	Предфильтр воздушный ФВК	4 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
106.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2370 х 3270, в составе:	
	КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2370 х 3270	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
107.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2370 х 3270, в составе:	
	КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2370 х 3270	1
	Предфильтр воздушный ФВК	9 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
108.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2500 х 2370 х 3270, в составе:	
	КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2500 х 2370 х 3270	1
	Предфильтр воздушный ФВК	9 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1

109.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2900 х 2370 х 3270, в составе:	
	КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2900 х 2370 х 3270	1
	Предфильтр воздушный ФВК	9 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
110.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 3270 х 2370, в составе:	
	КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 3270 х 2370	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
111.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 3270 х 2370, в составе:	
	КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 3270 х 2370	1
	Предфильтр воздушный ФВК	9 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
112.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2500 х 3270 х 2370, в составе:	
	КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2500 х 3270 х 2370	1
	Предфильтр воздушный ФВК	9 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
113.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2900 х 3270 х 2370, в составе:	
	КФУ2-150х54000, размер (Д х Ш х В) 2900 х 3270 х 2370	1
	Предфильтр воздушный ФВК	9 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
114.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х72000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 4360, в составе:	
	КФУ2-150х72000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 2180 х 4360	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
115.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х72000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 4360, в составе:	
	КФУ2-150х72000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 2180 х 4360	1
	Предфильтр воздушный ФВК	8 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
116.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х72000, размер (Д х Ш х В) 3100 х 2180 х 4360, в составе:	
	КФУ2-150х72000, размер (Д х Ш х В) 3100 х 2180 х 4360	1
	Предфильтр воздушный ФВК	8 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
117.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х72000, размер (Д х Ш х В) 3500 х 2180 х 4360, в составе:	
	КФУ2-150х72000, размер (Д х Ш х В) 3500 х 2180 х 4360	1
	Предфильтр воздушный ФВК	8 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1

118.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х81000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 3270 х 3270, в составе:	
	КФУ2-150х81000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 3270 х 3270	1
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
119.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х81000, размер (Д х Ш х В) 2300 х 3270 х 3270, в составе:	
	КФУ2-150х81000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 3270 х 3270	1
	Предфильтр воздушный ФВК	9 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
120.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х81000, размер (Д х Ш х В) 3100 х 3270 х 3270, в составе:	
	КФУ2-150х81000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 3270 х 3270	1
	Предфильтр воздушный ФВК	9 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1
121.	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х81000, размер (Д х Ш х В) 3500 х 3270 х 3270, в составе:	
	КФУ2-150х81000, размер (Д х Ш х В) 2100 х 3270 х 3270	1
	Предфильтр воздушный ФВК	9 (при необходимости)
	Технический паспорт — руководство по эксплуатации	1

21. Маркировка медицинского изделия

Маркировка обеззараживателей должна соответствовать требованиям ГОСТ 15223-1, ГОСТ Р 50444 и ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 и ТУ 32.50.50–002-44999832-2022

На корпусе обеззараживателей должна быть нанесена маркировка, содержащая следующую информацию:

- наименование и адрес производителя;
- товарный знак производителя;
- наименование изделия и вариант исполнения;
- обозначение технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- дата изготовления;
- серийный номер;
- Осторожно! Обратитесь к руководству по эксплуатации;
- электрические характеристики: напряжение питания, потребляемая мощность, частота;
- защитное заземление.

Рис.5. Макет маркировки
медицинского изделия

АЭРОЛАЙФ
Обеззараживатели - очистители
фотокаталитические воздуха "Аэролайф КФУ2-150"
по ТУ 32.50.50-002-44999832-2022

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ КФУ2-150х150

серийный номер: _____
дата изготовления: XX.XX.XXXX

Класс потенциального риска изделия: I
Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты изготовления
Напряжение питания (50 Гц), В: 220
Потребляемая мощность, Вт: 122
Производительность, м3/час: 150
Габаритные размеры, мм: 1400x310x290
Регистрационное удостоверение _____ от _____
ТУ 32.50.50-002-44999832-2022

Идентификация и уничтожение изделия осуществляется согласно
требованиям СанПиН 2.1.3684-21

НЕСТЕРИЛЬНО НЕТОКСИЧНО



ООО "ЗВЕЗДА АЭРОЛАЙФ"
249020, Калужская область, Боровский р-н, д. Дубовик,
6-й Восточный проезд, здание №1
т. +7 495 923 22 20 www.aerolife.ru

Таблица 11. Маркировка

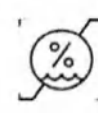
Символ	Значение
	Диапазон влажности
	Температурный диапазон
	Обратитесь к инструкции по применению
	Защитное заземление
	Изготовитель

Рис.6. Макет маркировки
транспортной упаковки

АЭРОЛАЙФ
Обеззараживатели - очистители
фотокаталитические воздуха "Аэролайф КФУ2-150"
по ТУ 32.50.50-002-44999832-2022


ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ КФУ2-150х150

серийный номер: _____
дата изготовления: XX.XX.XXXX

Класс потенциального риска изделия: I
Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты изготовления
Напряжение питания (50 Гц), В: 220
Потребляемая мощность, Вт: 122
Производительность, м3/час: 150
Габаритные размеры, мм: 1400x310x290
Получатель, адрес: _____
ИНН получателя: _____
Телефон получателя: _____
Регистрационное удостоверение _____ от _____
ТУ 32.50.50-002-44999832-2022



Идентификация и уничтожение изделия осуществляется согласно
требованиям СанПиН 2.1.3684-21

НЕСТЕРИЛЬНО НЕТОКСИЧНО

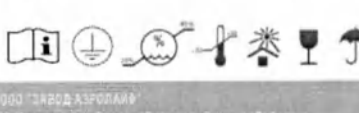

ООО "ЗВЕЗДА АЭРОЛАЙФ"
249020, Калужская область, Боровский р-н, д. Дубовик,
6-й Восточный проезд, здание №1
т. +7 495 923 22 20 www.aerolife.ru

Таблица 12. Маркировка

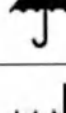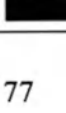Символ	Значение
	Обратитесь к инструкции по применению
	Защитное заземление
	Диапазон влажности
	Температурный диапазон
	Беречь от солнечных лучей
	Осторожно! Хрупкое
	Беречь от влаги
	Изготовитель

Транспортная маркировка по ГОСТ 14192. На упаковочную тару должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Осторожно! Хрупкое», «Беречь от влаги».

22. Упаковка медицинского изделия

Упаковка обеззараживателей и эксплуатационной документации должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444.

Перед упаковыванием обеззараживатели должны быть законсервированы по ГОСТ 9.014 для условий хранения 4 по ГОСТ 15150. Вариант защиты ВЗ-10. Срок защиты без переконсервации — 2 года.

Обеззараживатели должны быть герметично упакованы в полиэтиленовую плёнку по ГОСТ 10354.

Для транспортировки на дальние расстояния упакованные обеззараживатели должны быть помещены в ящики по ГОСТ 9142. В качестве заполнителя может быть использован гофрированный картон по ГОСТ Р 52901.

В каждую упаковку должен быть вложен упаковочный лист, в котором должны быть указаны:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
- наименование изделия;
- условные номера упаковщика и контролера;
- дата упаковывания (месяц, год);
- штамп ОТК.

23. Перечень национальных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие

ГОСТ Р 15223-1-2020. Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.

ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов.

ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ Р 50444-2020. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010. Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учётом основных функциональных характеристик

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014. Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учётом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания.

МУ-287-113. Методические указания Минздрава России по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения.

СП 2.1.3678-20. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.

СанПиН 2.1.3684-21. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Р 3.5.1904-04. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях.

24. Техническое обслуживание

1. Не реже 1 раза в 6 месяцев:

- проведение внешнего осмотра;
- удаление с наружных поверхностей блоков пыли, грязи;
- проверка надёжности крепления разъёмов кабелей.

2. Не реже одного раза в 60 месяцев:

- очистка блока зарядки аэрозолей;
- замена электростатических фильтров (ФК);
- замена адсорбционно-каталитических фильтров (АК);
- замена УФ-А излучателей.

Техническое обслуживание обеззараживателей могут производить компании, сотрудники которых прошли обучение на заводе-изготовителя и получили сертификат о допуске к техническому обслуживанию систем Аэролайф.

Перечень критических отказов и предельных состояний, а также меры по их устранению приведены в Таблице 13.

Таблица 13. Перечень критических отказов и предельных состояний, а также меры по их устранению

Неисправность	Вероятная причина
При включении обеззараживателя электродвигатель не работает	Неисправен выключатель
	Обрыв кабеля питания или монтажных проводов, неисправность вилки шнура питания.
	Отсутствие питания в электрической сети
	Отсутствие контакта щёток с коллектором
	Износ/повреждение щёток
Образование кругового огня на коллекторе	Износ/ «зависание» щёток
	Неисправность в обмотке якоря

При работе из вентиляционных отверстий появляется дым или запах горячей изоляции	Неисправность обмоток электродвигателя. Неисправность электрической части инструмента.
--	---

25. Очистка и дезинфекция

Наружные поверхности обеззараживателей должны быть устойчивы к многократной дезинфекции по МУ-287-11 раствором, содержащим 3 % перекись водорода и 0,5 % моющего средства. Для снижения коррозионного действия моющих растворов рекомендуется использовать ингибитор коррозии — 0,14 % олеата натрия.

26. Информация о стерилизации

Медицинское изделие не стерильно и не подвергается стерилизации.

27. Перечень основных характеристик по эксплуатации, условиям хранения и транспортированию

Изделие устойчиво к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического использования УХЛ 4.2.

Таблица 14. Условия эксплуатации

Параметр	Значение
Температура, °С	от +10 до +35
Относительная влажность, %	от 30 до 80
Атмосферное давление, гПа	от 750 до 1060

Таблица 15. Условия хранения

Параметр	Значение
Температура, °С	Без упаковки: от -5 до +40
	В упаковке: от -30 до +50
Относительная влажность, %	от 10 до 80
Атмосферное давление, гПа	от 750 до 1060

Таблица 16. Условия транспортирования

Параметр	Значение
Температура, °С	от -30 до +50
Относительная влажность, %	от 10 до 80
Атмосферное давление, гПа	от 750 до 1060

До введения в эксплуатацию обеззараживатель следует хранить и транспортировать в заводской упаковке по ГОСТ 15150.

Транспортировка устройства должна производиться с соблюдением осторожности и только в оригинальной упаковке, обеспечивающей защиту от толчков, ударов, падений.

28. Требования к охране окружающей среды

Обеззараживатели при использовании, транспортировке и хранении не оказывают негативного воздействия на человека и окружающую среду, а также на ионный состав воздуха.

29. Порядок осуществления утилизации

Утилизация должна проводиться согласно правилам и нормативам СанПиН 2.1.3684–21. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, руководствуясь требованиями, применяемыми к отходам класса А.

Изделие не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. В этой связи утилизация изделия может проводиться по правилам утилизации общепромышленных отходов

30. Срок службы медицинского изделия

Обеззараживатели должны иметь время выхода на режим не более 10 секунд.

Средний срок службы обеззараживателя до списания должен быть не менее 10 лет, при интенсивности эксплуатации 8 часов в сутки.

31. Гарантия производителя

Гарантийный срок хранения оборудования — 24 месяца.

Указанные сроки хранения, ресурс и срок службы оборудования действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации и плановом сервисном обслуживании.

Гарантия изготовителя — 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты изготовления, а в случае покупки через торговую сеть с даты продажи.

Обеззараживатели с производительностью менее 6000 м³/ч должны быть исправны при напряжении питания 220 В, допускаемое отклонение напряжения ± 22 В и частотой 50 Гц с допускаемым отклонением ± 1 Гц. Обеззараживатели с производительностью более 6000 м³/ч должны быть исправны при напряжении питания 380 В, допускаемое отклонение

напряжения ± 22 В и частотой 50 Гц с допускаемым отклонением ± 1 Гц Производитель должен предоставлять гарантийный талон.

Условия предоставления гарантийного обслуживания:

- Гарантия действительна только при предоставлении правильно заполненного гарантийного талона.
- Гарантия не распространяется на плановое техническое обслуживание обеззараживателя.
- Гарантия не распространяется на случаи использования воздухоочистителя в несоответствии с требованиями, приведёнными в техническом паспорте — руководстве по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится:

- Если отсутствует гарантийный талон, либо в гарантийном талоне отсутствуют штамп ОТК и печать организации производителя.
- При наличии следов самостоятельного ремонта, разборки-сборки, модификации изделия или ремонта в не уполномоченных производителем мастерских.
- Если не читается (стёрт, подчищен, исправлен, уничтожен) серийный номер изделия.

Гарантийный талон

Гарантийным талоном производитель изделия ООО «ЗАВОД АЭРОЛАЙФ» подтверждает отсутствие дефектов в поставляемом изделии и обязуется обеспечить ремонт и замену вышедших из строя элементов (кроме расходных элементов) в течение всего гарантийного срока.

Условия гарантии указаны в гарантийном талоне. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить технический паспорт - руководство по эксплуатации изделия и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Обратите внимание на наличие наименования изделия, варианта исполнения, серийного номера, гарантийного срока, наименования, подписи производителя и даты продажи изделия.

Изготовитель обеспечивает ремонт изделия по истечении гарантийного срока в течение всего срока службы по отдельному договору с потребителем.

Профилактическое обслуживание и замена фильтрующих элементов не входит в гарантийное обслуживание.

Модель	Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150 модель _____
Серийный номер	_____
Производительность по воздуху	_____ м ³ /ч
Номинальная мощность	_____ кВт
Напряжение питания	_____ В ~ 50 Гц
Масса	_____ кг
Дополнительно	_____
ОТМЕТКА ОТК	
ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	

Рис. 7. Макет гарантийного талона

	ВНИМАНИЕ! Данный талон является основанием для проведения гарантийного обслуживания. Проверьте правильность заполнения данного талона. Производитель оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании оборудования в случае неправильного заполнения талона, отсутствии печати организации-продавца и даты продажи.
--	---

Рис.8. Надпись на обратной стороне гарантийного талона

32. Рекламация

В случае если в период гарантийных обязательств обеззараживатель не работает или обнаружен дефект, потребитель должен выслать в адрес производителя письменное извещение со следующими данными:

- вариант исполнения обеззараживателя, заводской номер, дата выпуска и дата ввода в эксплуатацию;
- характер дефекта.

Рекламации направлять по адресу:

Предприятие производитель ООО «ЗАВОД АЭРОЛАЙФ»

249020, Калужская область, Боровский р-н, д. Добрино,

6-й Восточный проезд, владение №1


Порядок рекламирования и предъявления штрафных санкций определяется действующими условиями поставки продукции.

Таблица 17. Лист регистрации рекламаций


Содержание	Меры, принятые по рекламации	Подпись лица, ответственного за ремонт

Общий габаритный чертёж


1. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х150, размер (Д x Ш x В) 1400 x 310 x 290

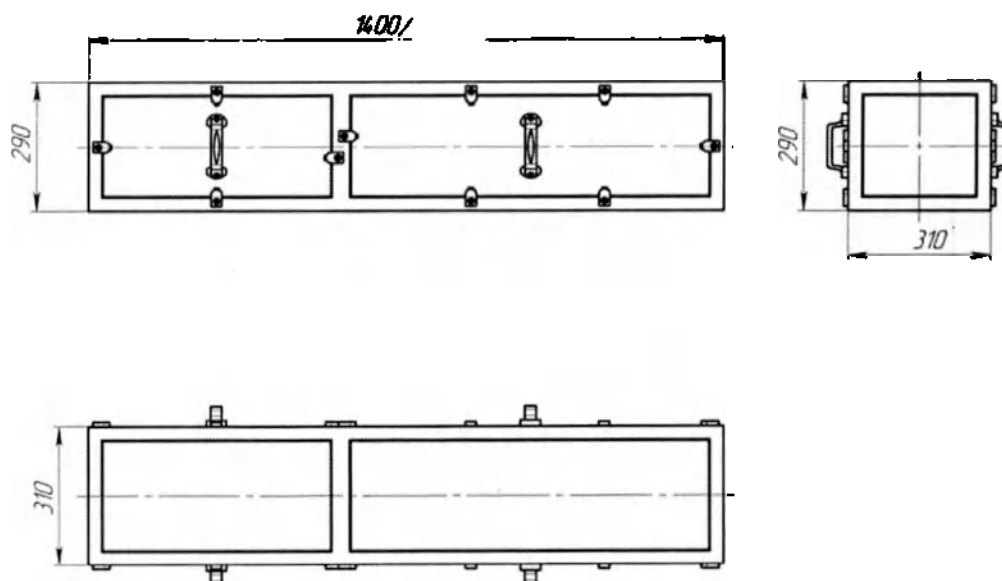


2. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х150, размер (Д x Ш x В) 1500 x 310 x 290

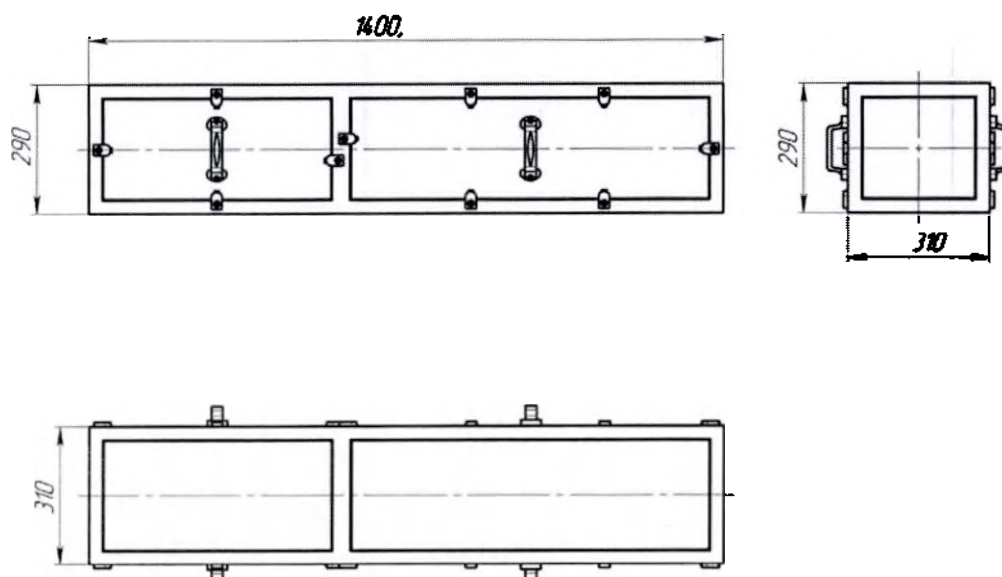


3. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х150У, размер (Д x Ш x В) 880 x 325 x 355

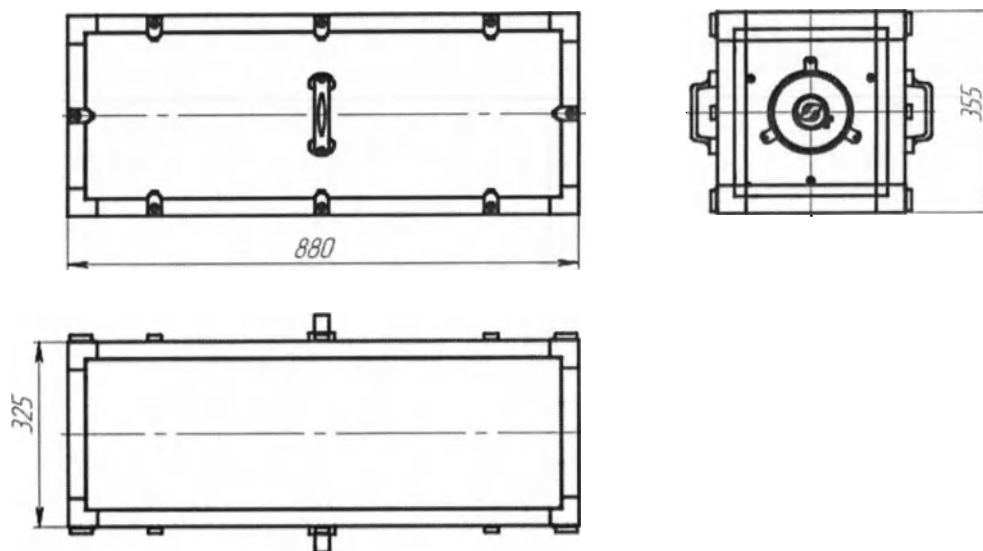


4. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х300, размер (Д x Ш x В) 1400 x 290 x 480

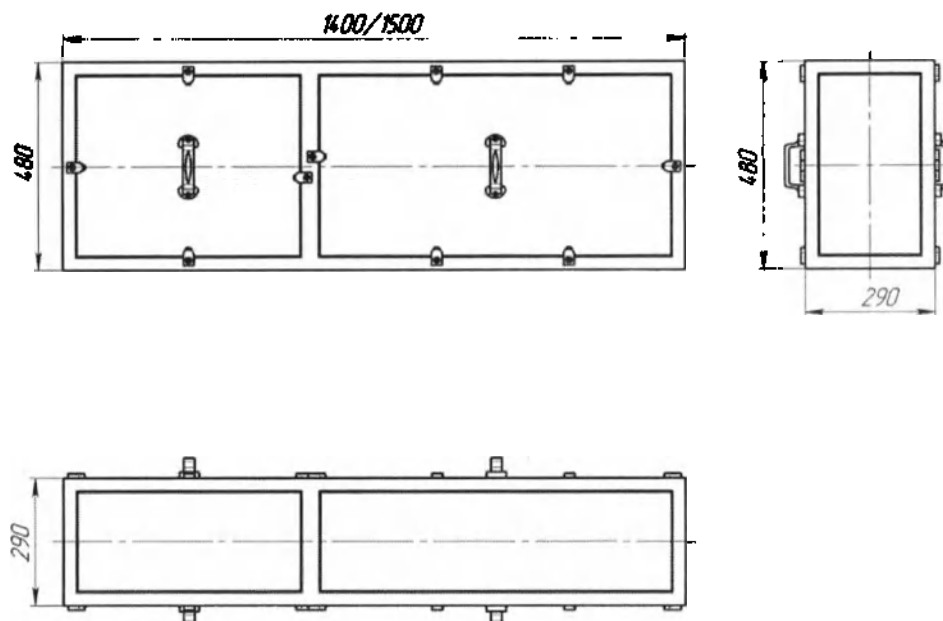


5. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х300, размер (Д x Ш x В) 1500 x 290 x 480

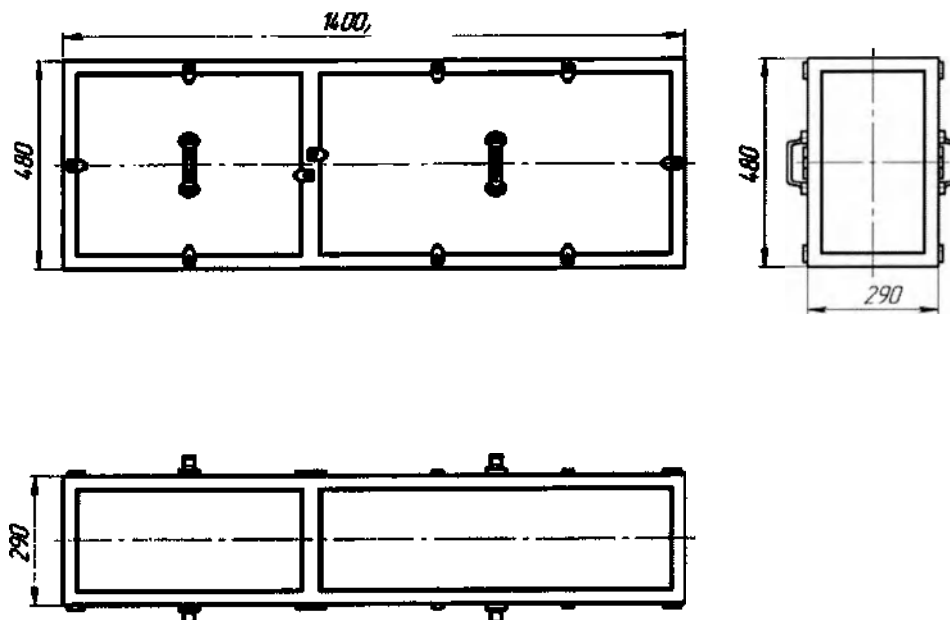


6. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х300, размер (Д x Ш x В) 1400 x 480 x 290

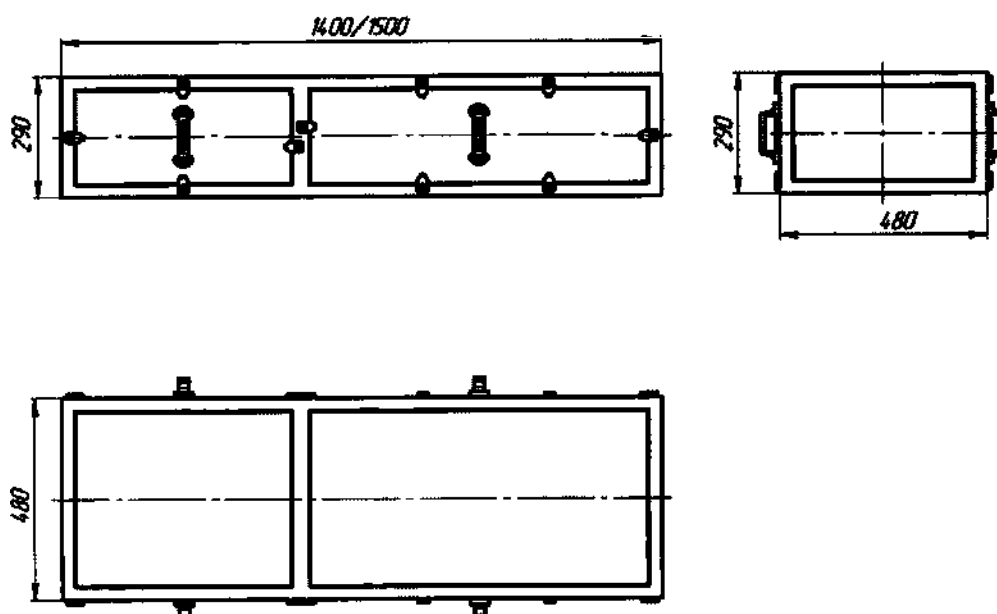


7. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х300, размер (Д x Ш x В) 1500 x 480 x 290

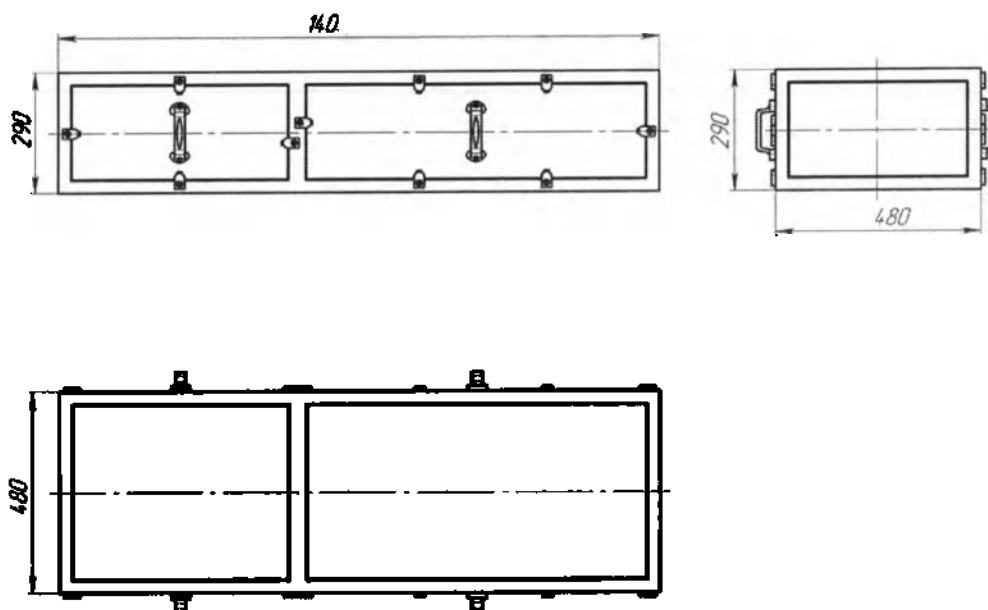


8. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-300У, размер (Д x Ш x В) 880 x 550 x 355

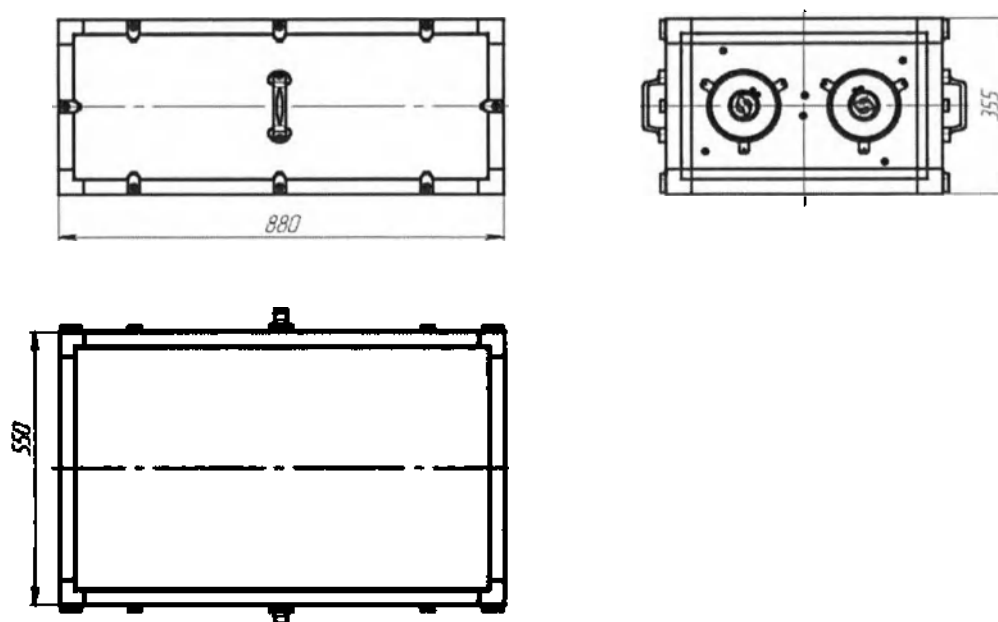


9. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1400 x 290 x 660

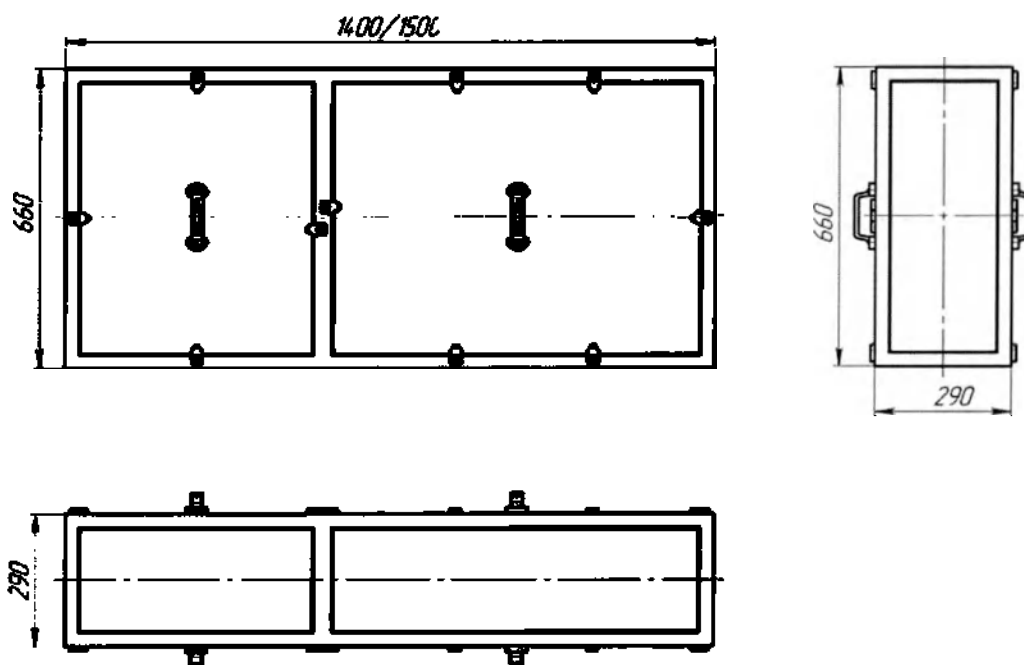


10. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1500 x 290 x 660

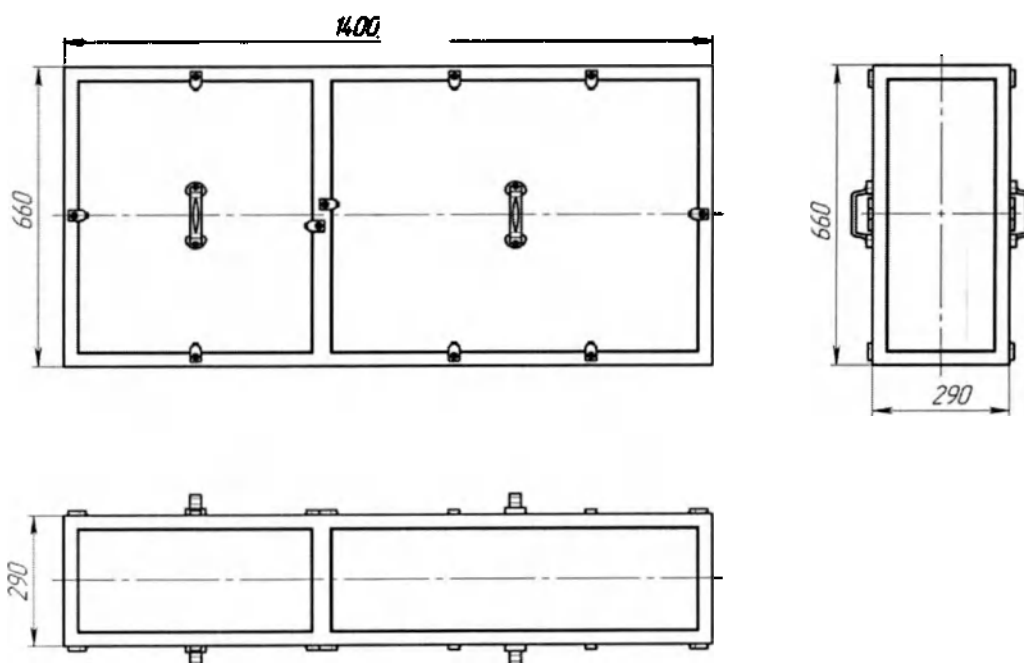


11. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1400 x 660 x 290

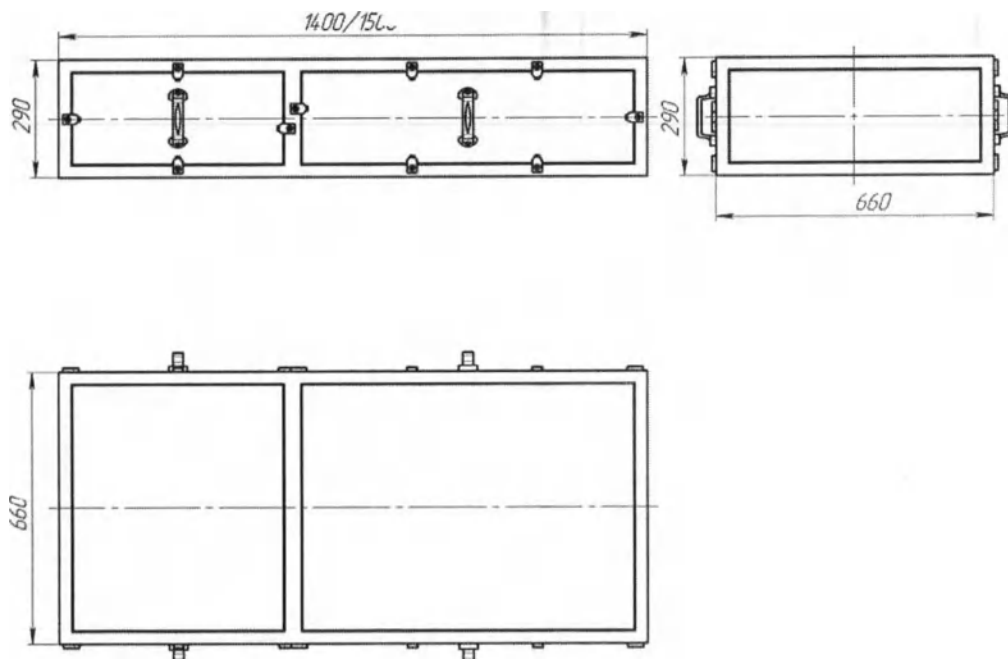


12. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1500 x 660 x 290

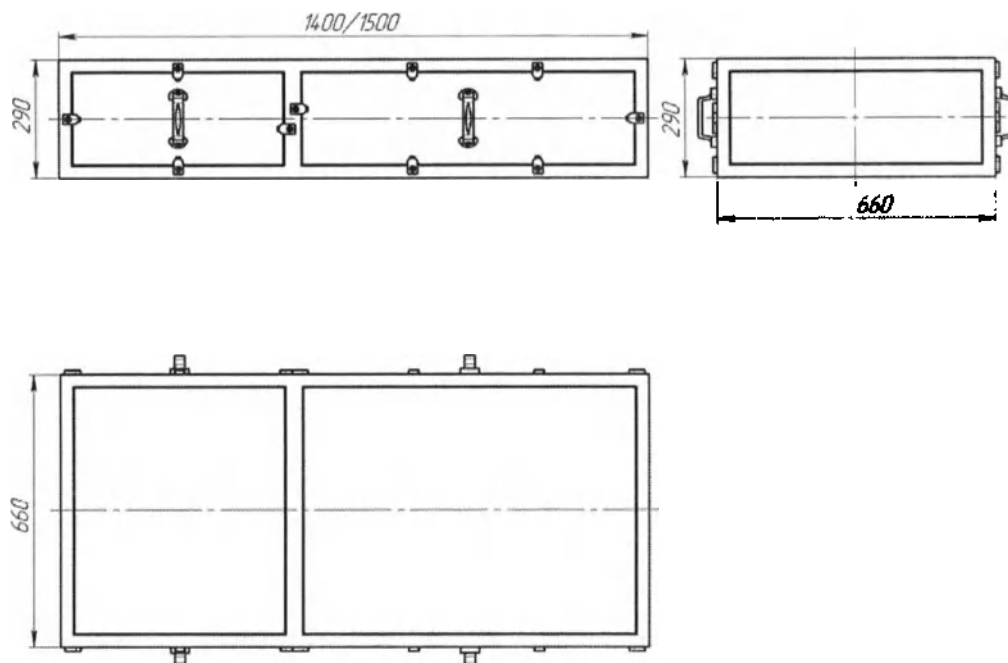


13. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1400 x 480 x 480

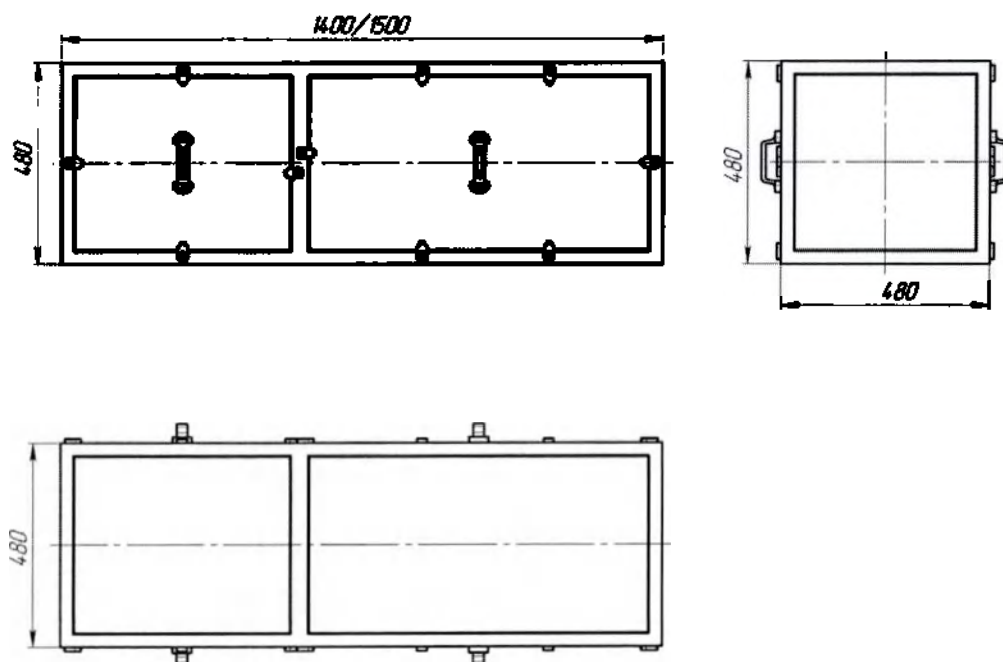


14. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450, размер (Д x Ш x В) 1500 x 480 x 480

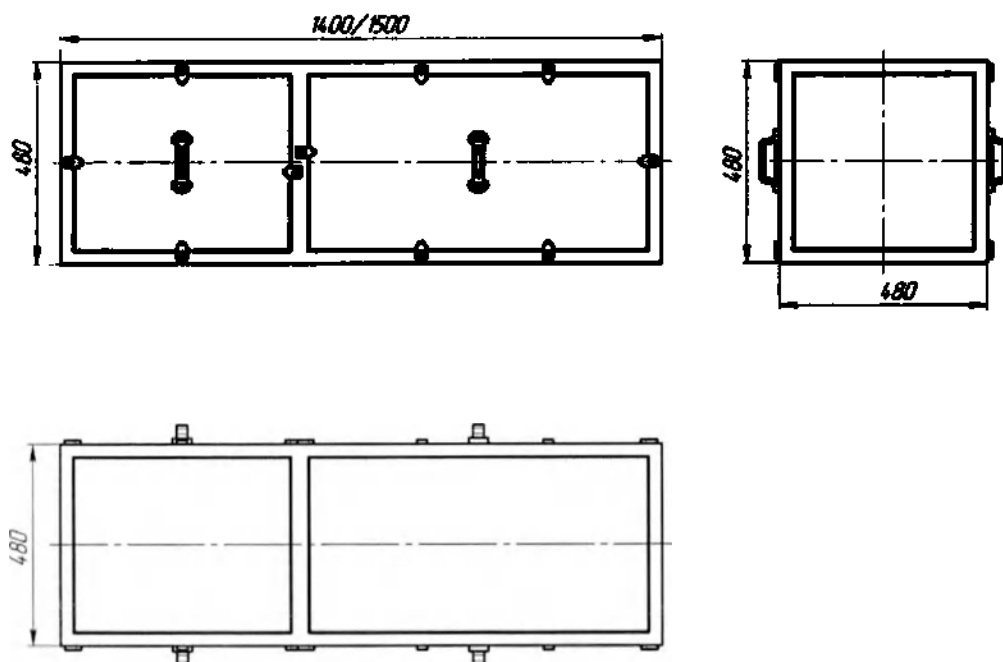


15. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 880 x 790 x 355

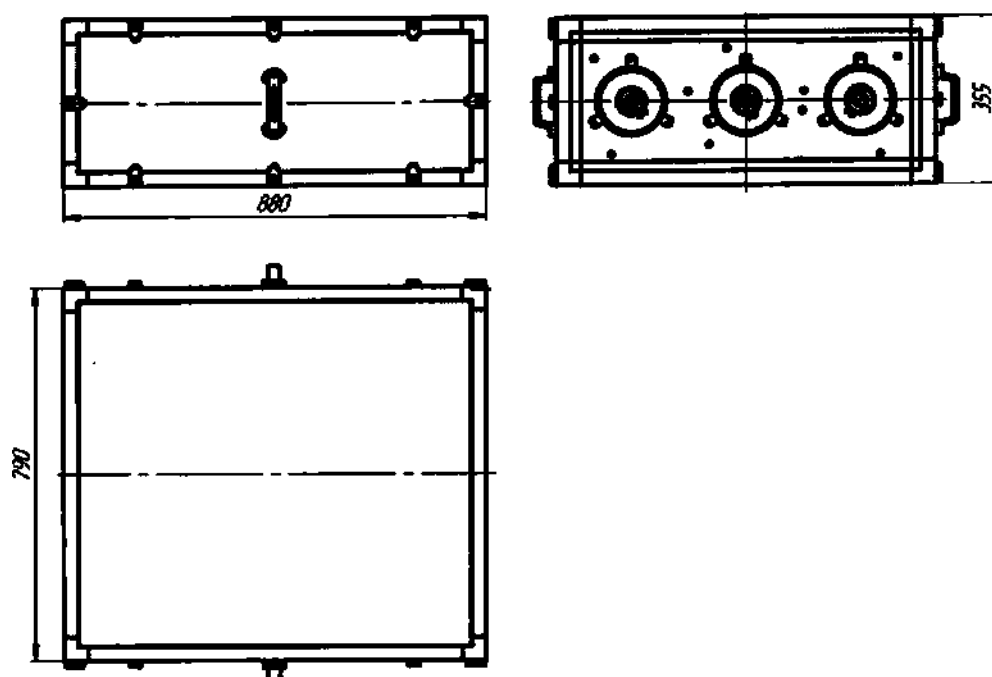


16. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х450У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 880 x 550 x 595

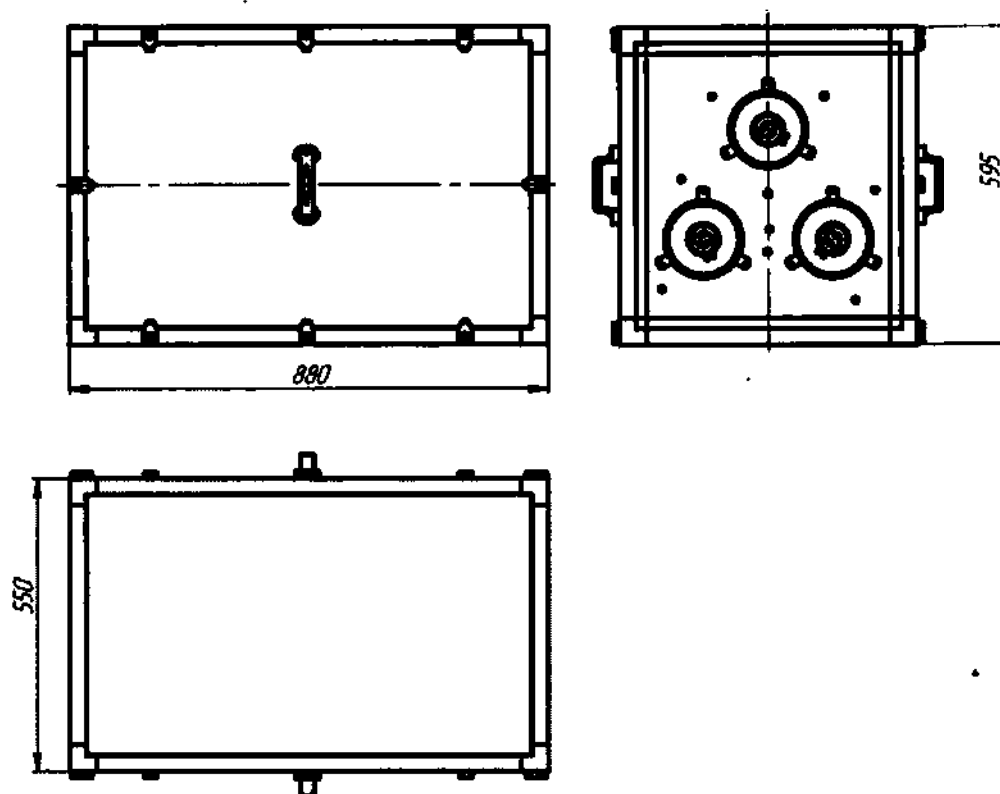


17. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1400 x 480 x 480

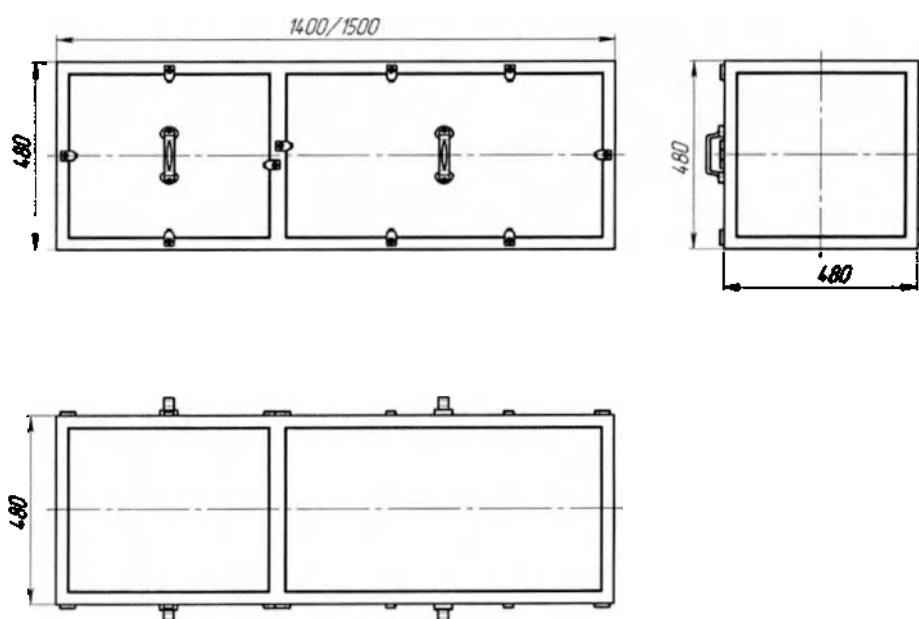


18. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1500 x 480 x 480

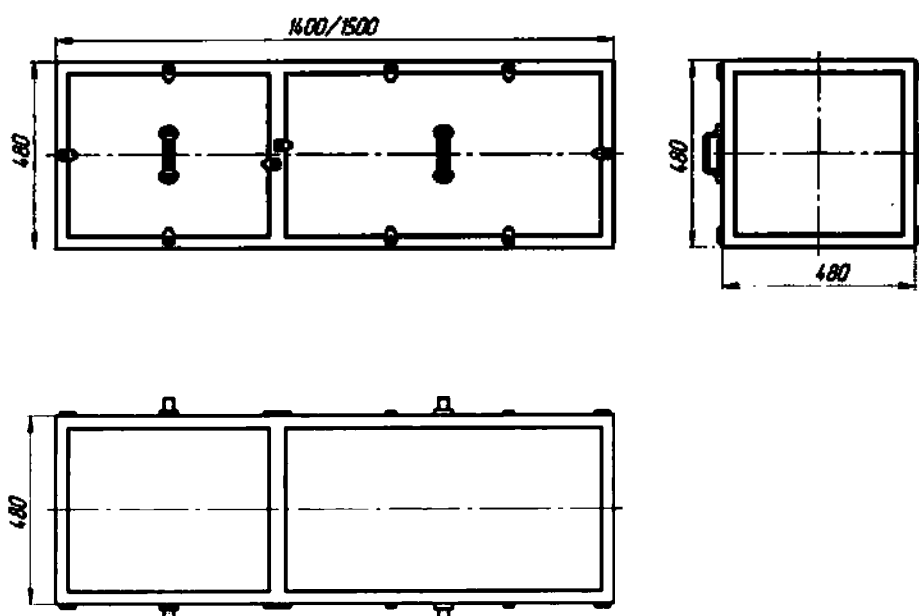


19. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1400 x 290 x 880

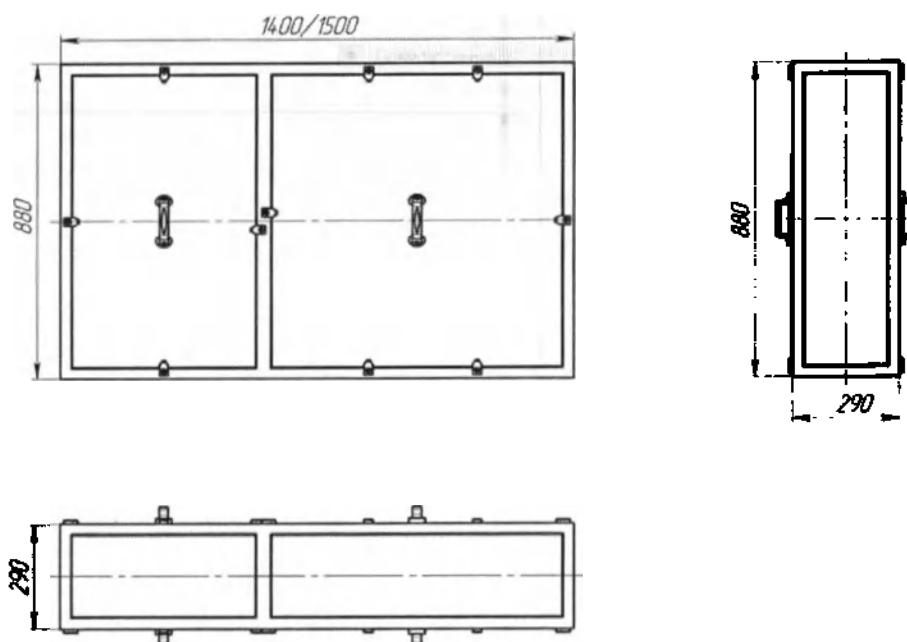


20. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1500 x 290 x 880

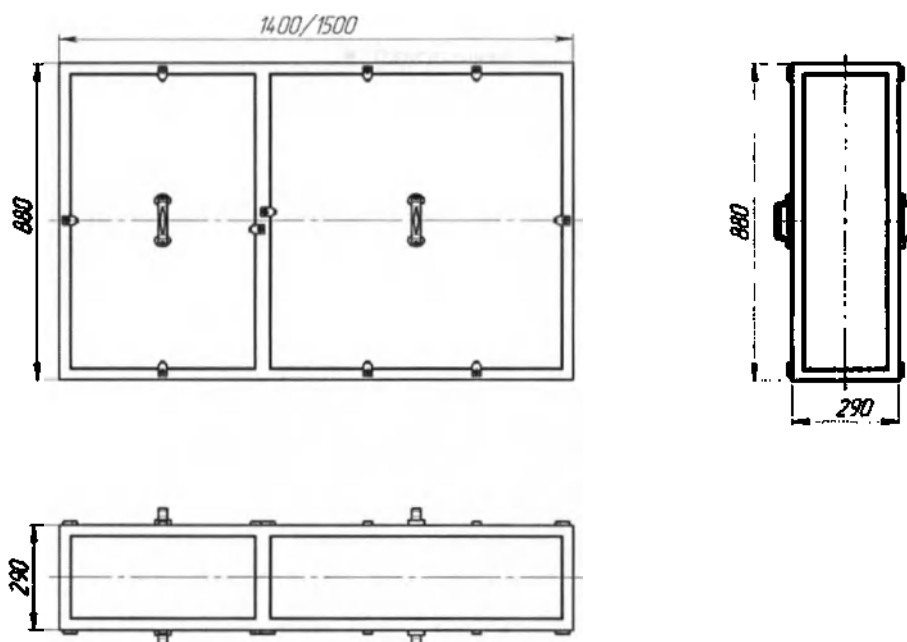


21. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1400 x 880 x 290

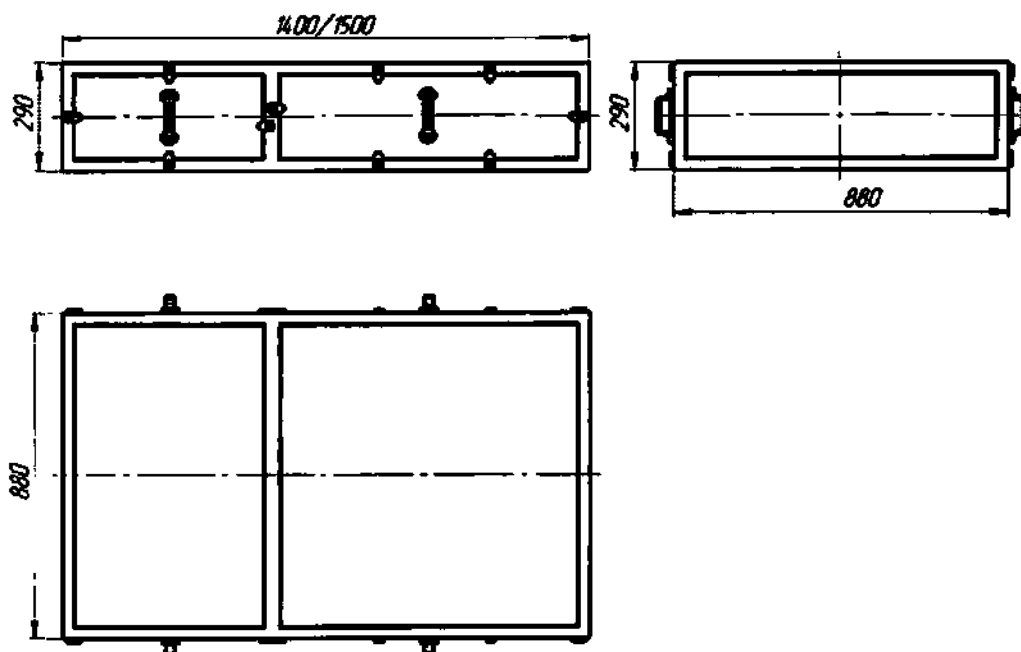


22. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600, размер (Д x Ш x В) 1500 x 880 x 290

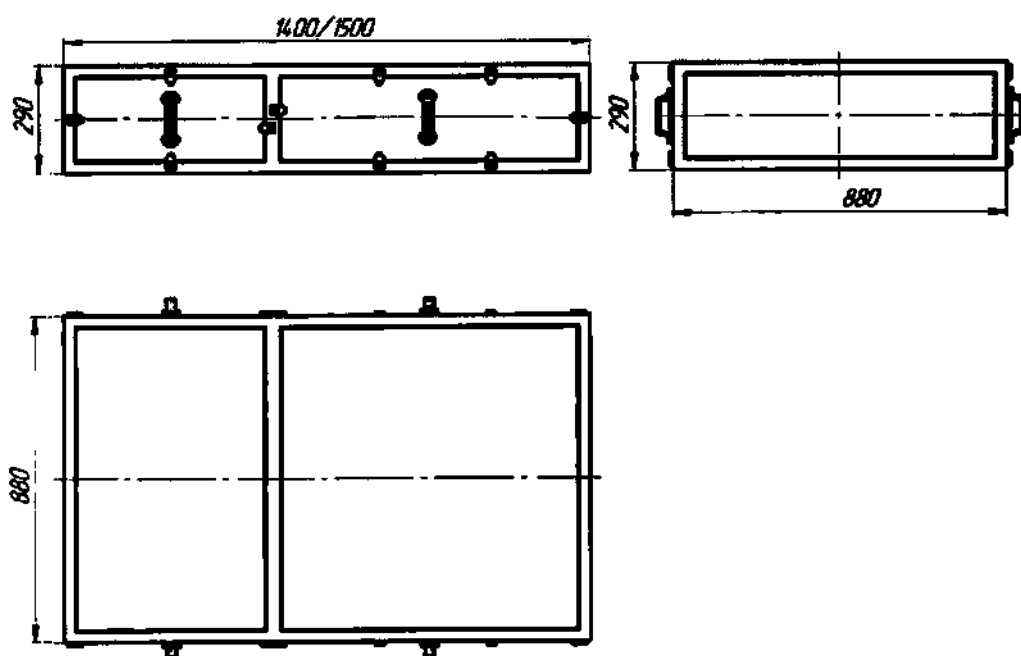


23. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 880 x 1030 x 355

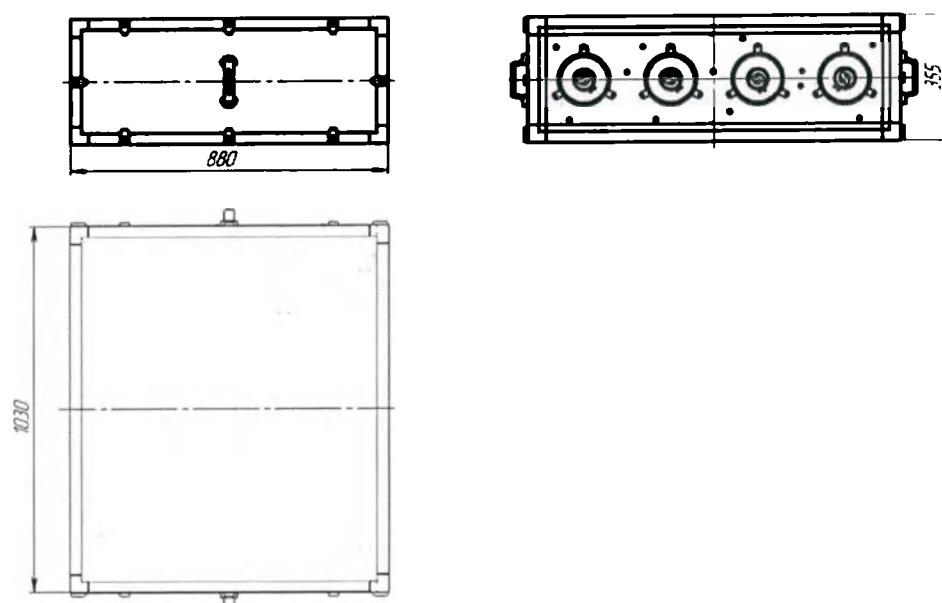


24. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х600У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 880 x 550 x 595

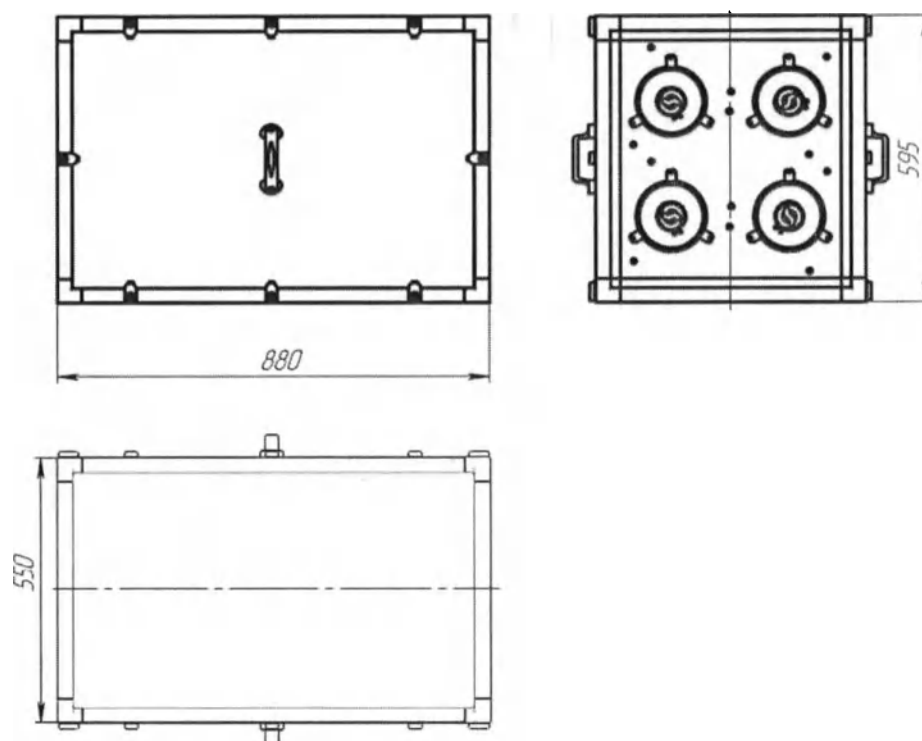


25. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х600У исп. 3, размер (Д x Ш x В) 970 x 550 x 595

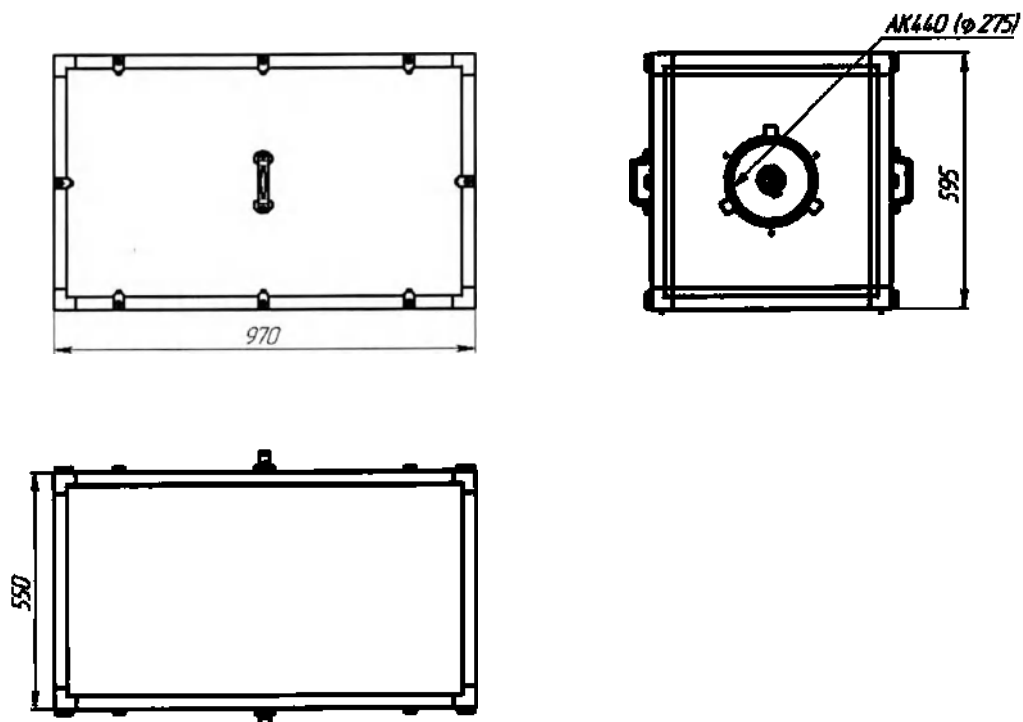


26. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1400 x 480 x 660

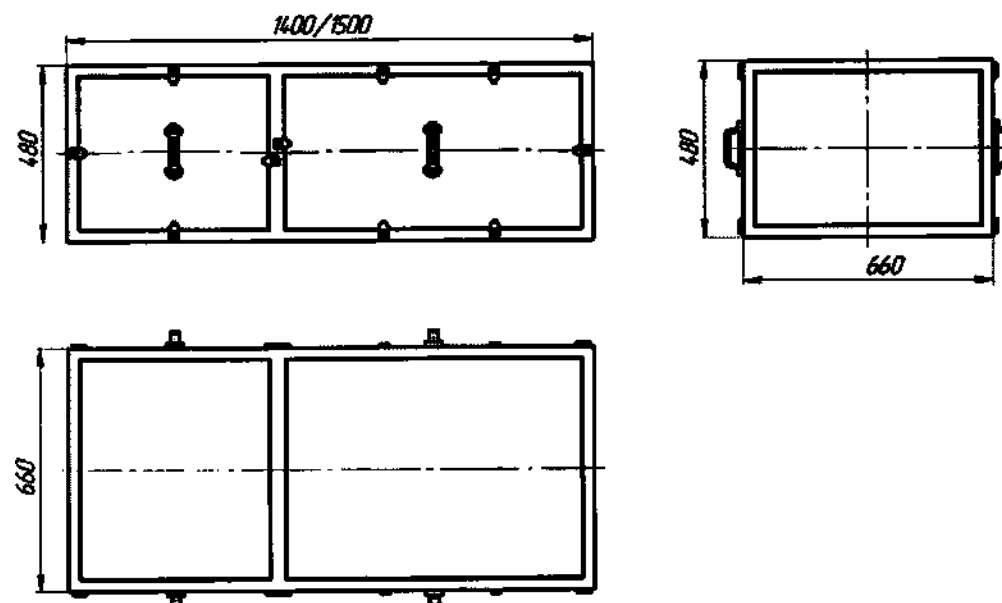


27. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1500 x 480 x 660

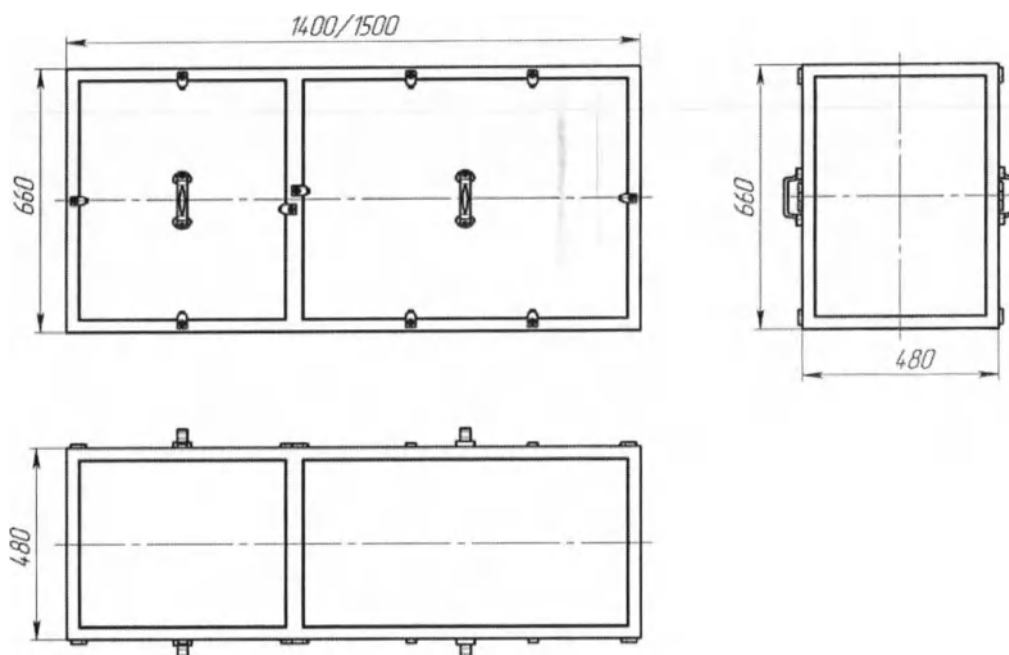


28. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1400 x 660 x 480

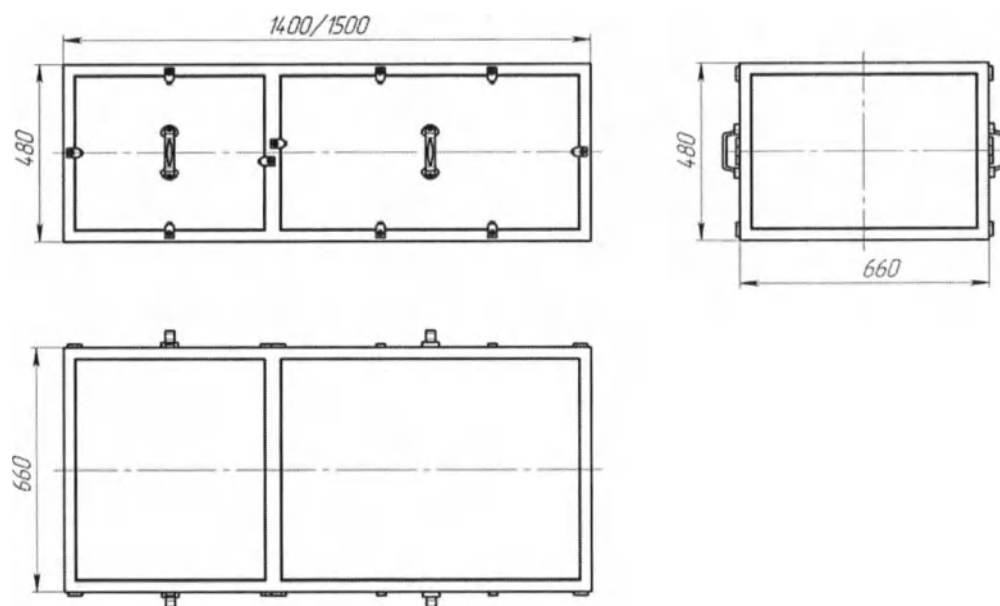


29. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х900, размер (Д x Ш x В) 1500 x 660 x 480

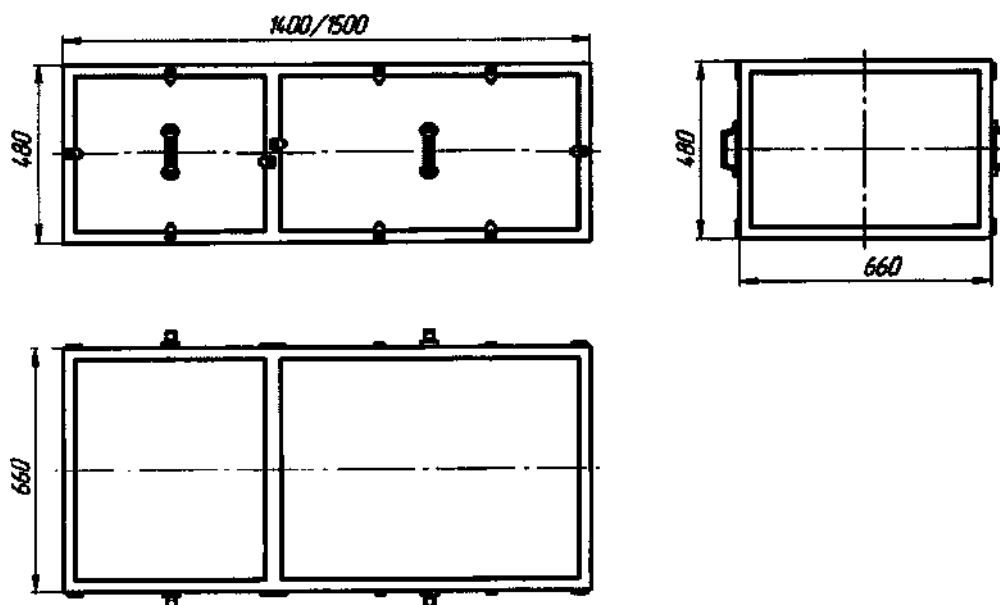


30. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х900У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 880 x 790 x 595

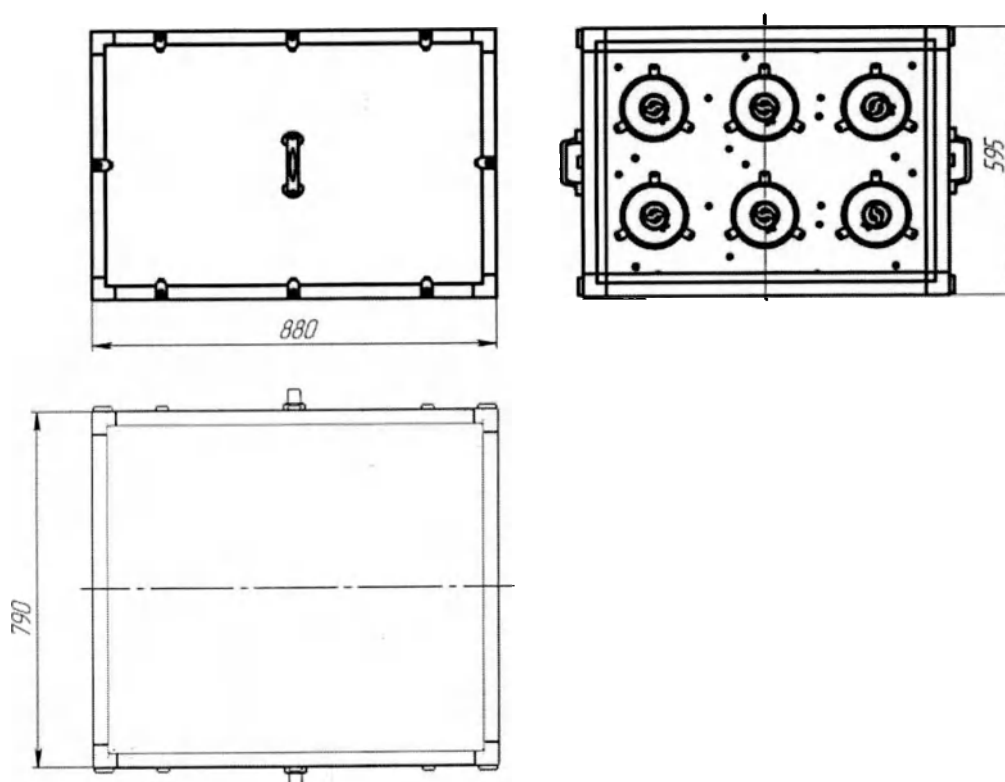


31. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х900У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 970 x 790 x 595

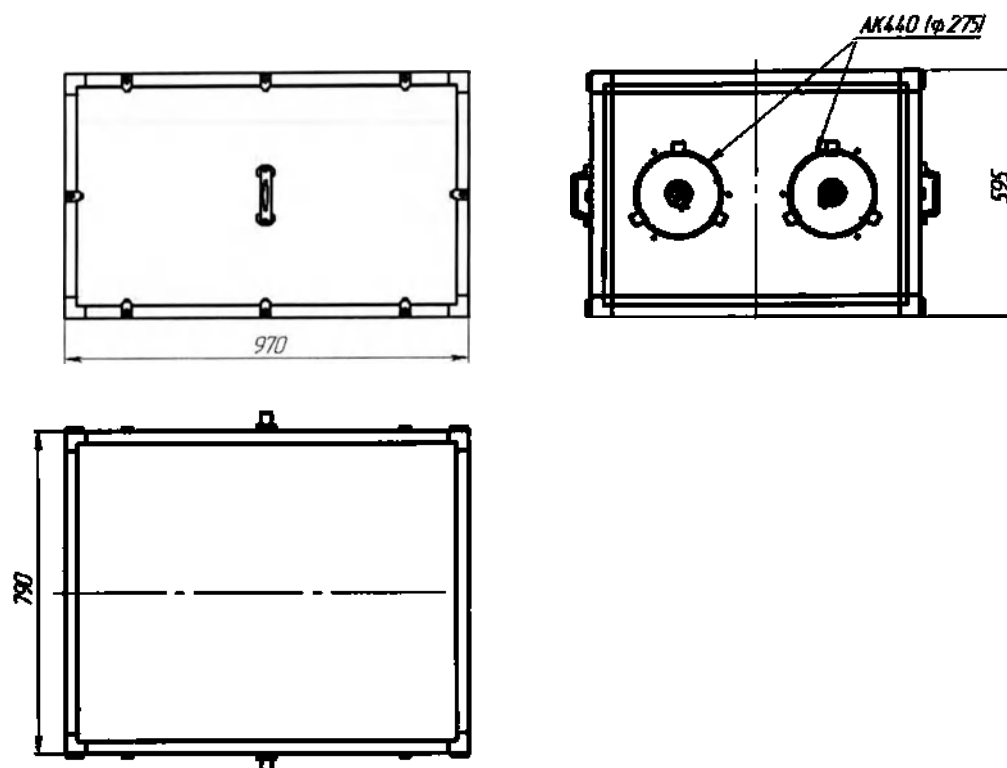


32. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х1000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 490 x 490

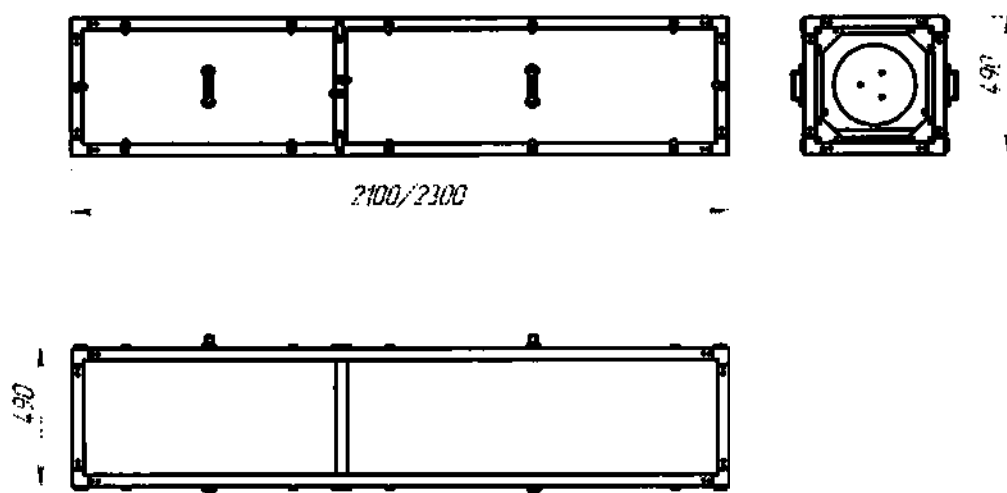


33. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х1000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 490 x 490

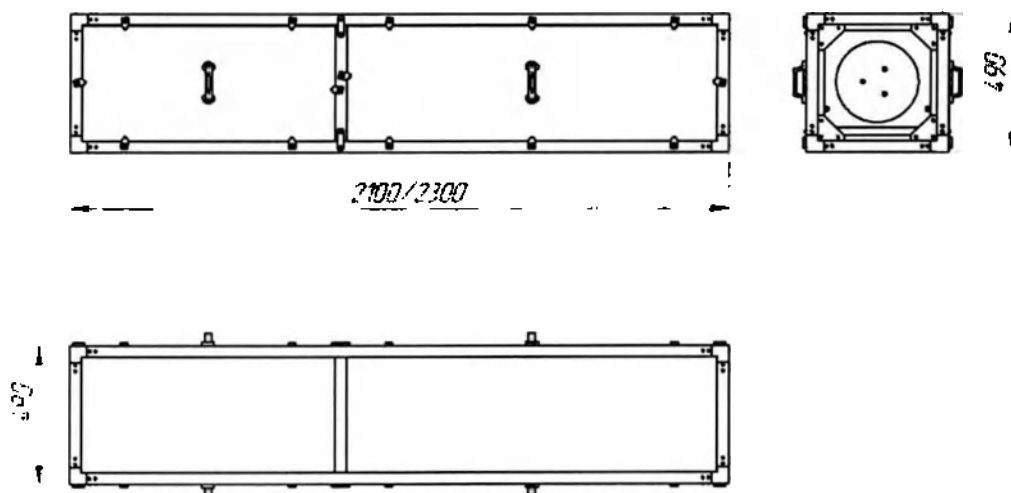


34. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х1000У, размер (Д x Ш x В) 1450 x 420 x 420

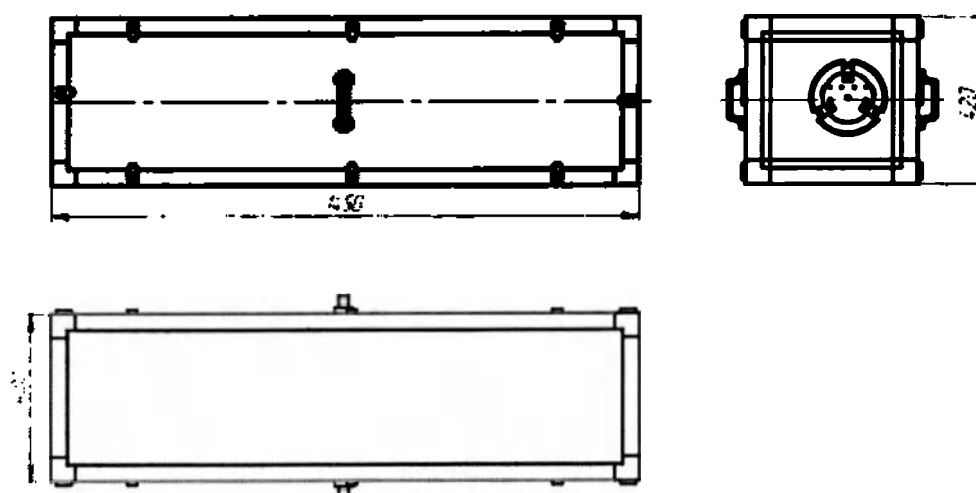


35. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х2000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 490

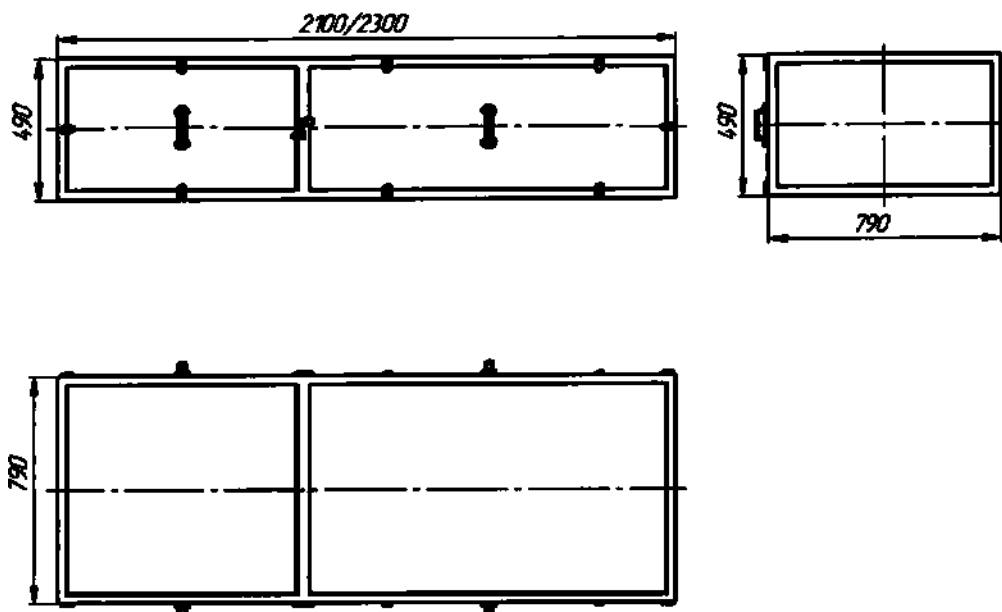


36. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х2000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 490

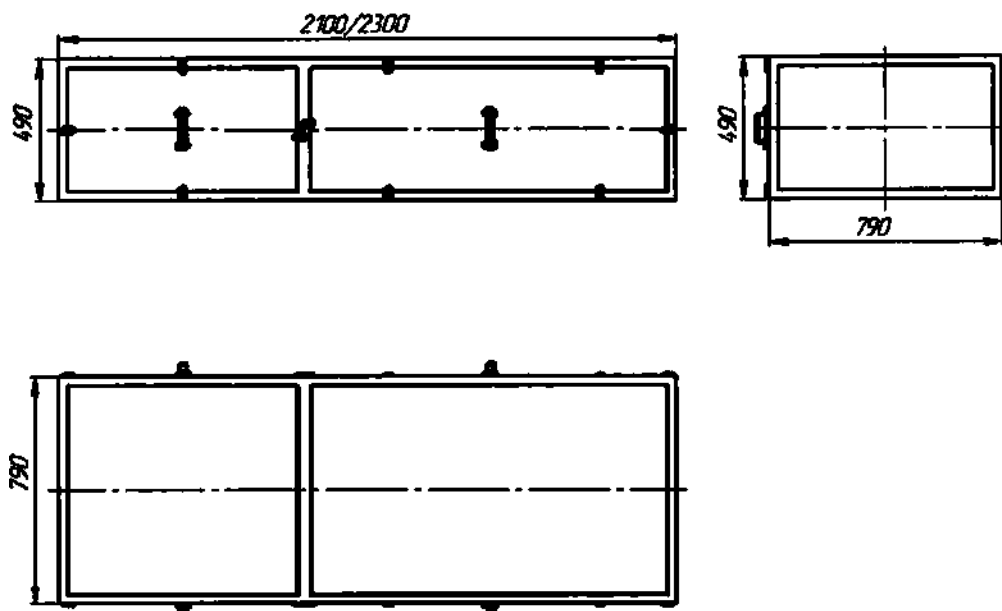


37. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х2000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 490 x 790

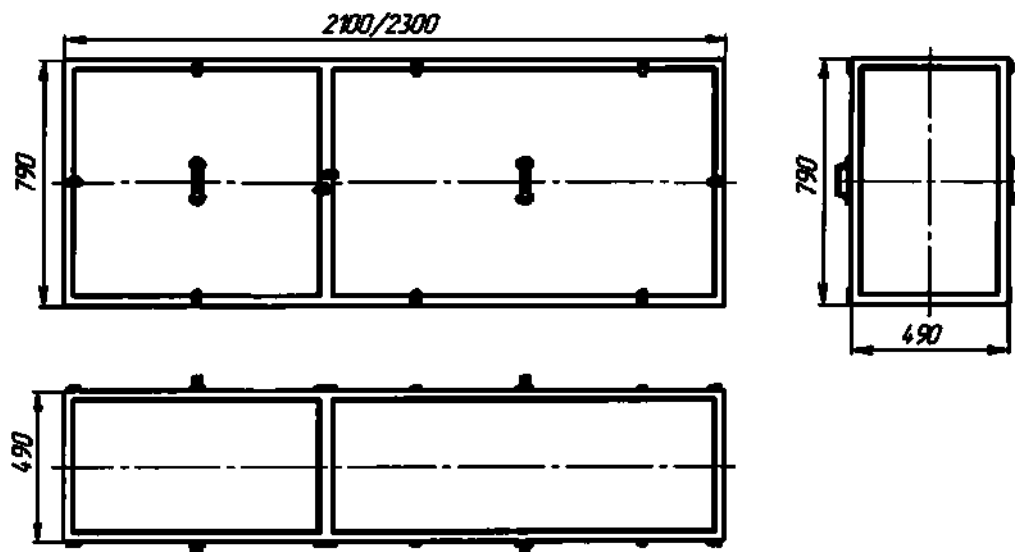


38. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х2000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 490 x 790

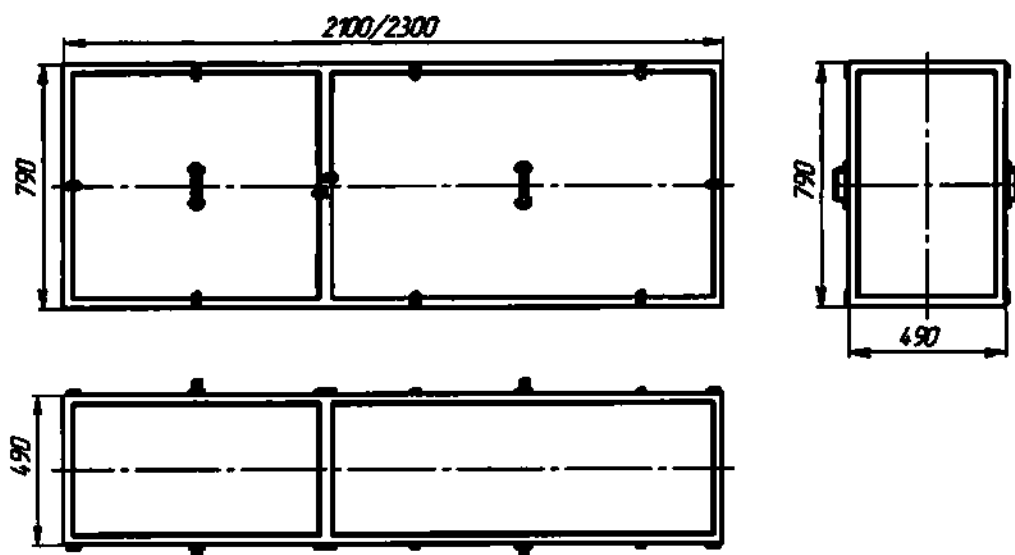


39. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х2000У, размер (Д x Ш x В) 1450 x 700 x 420

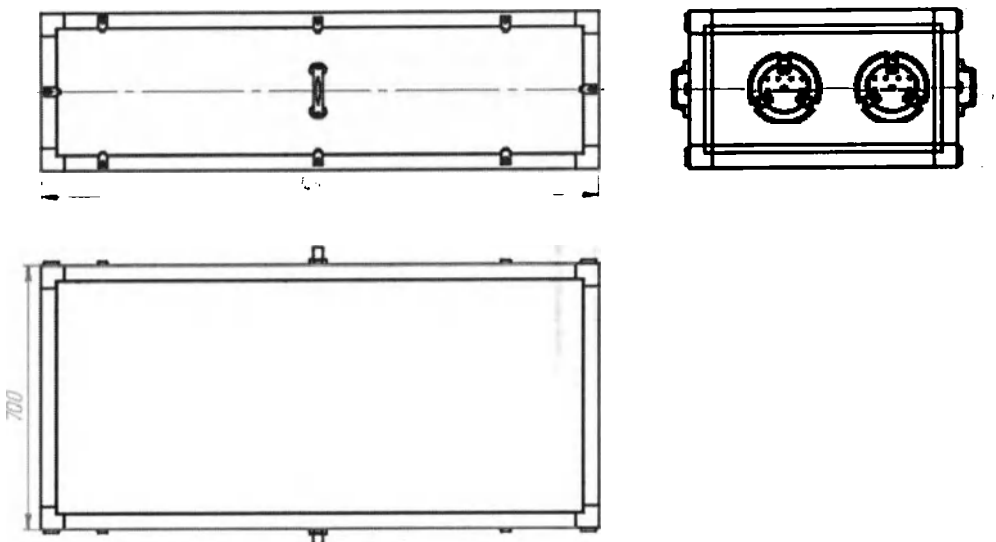


40. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х3000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 490

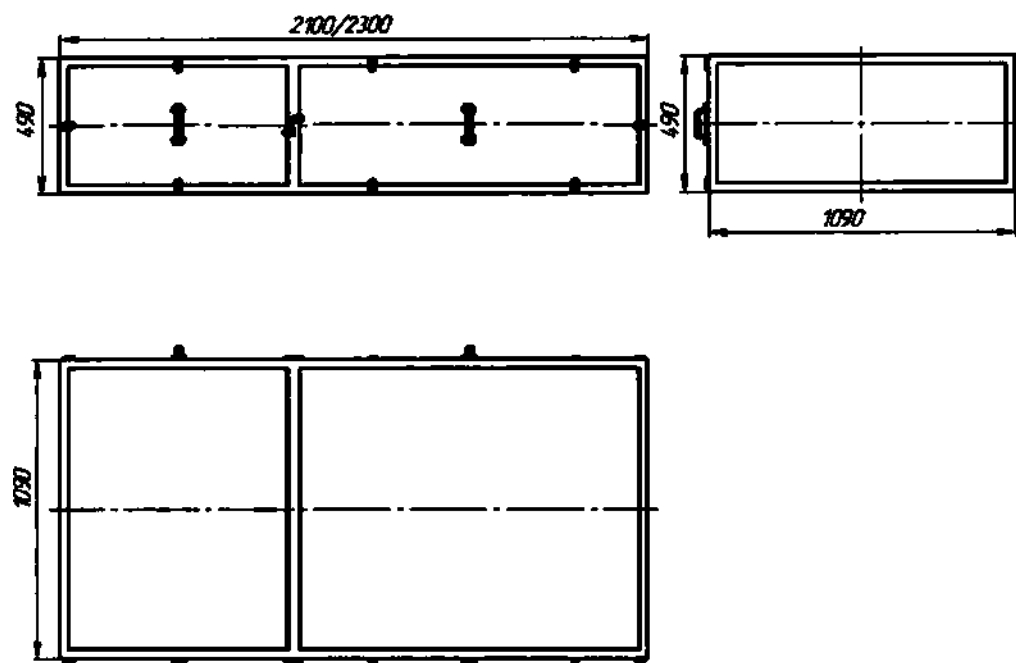


41. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х3000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 490

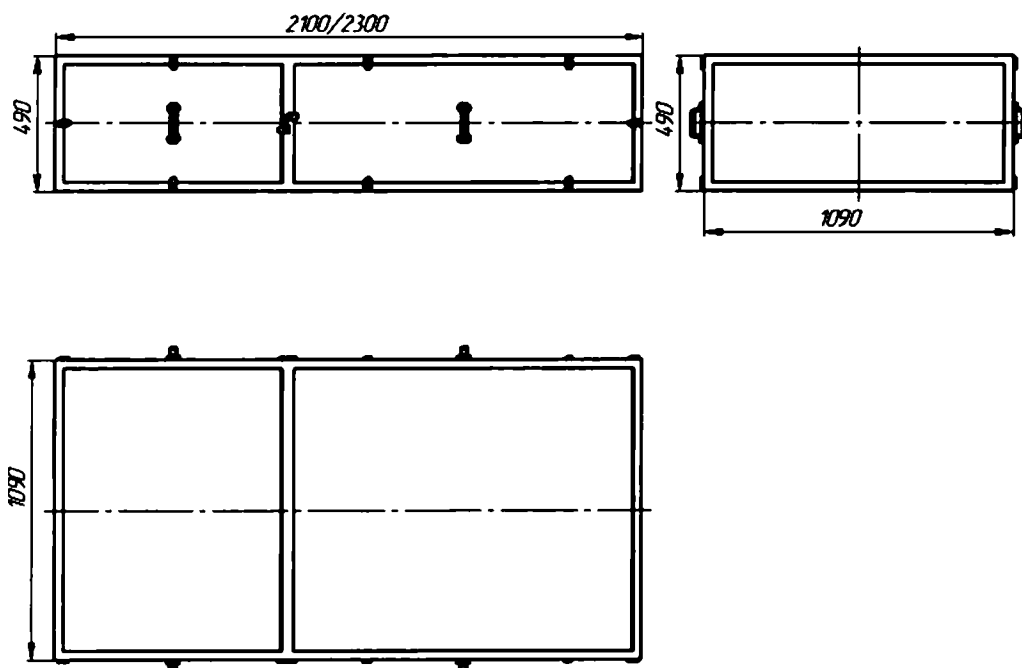


42. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х3000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 790

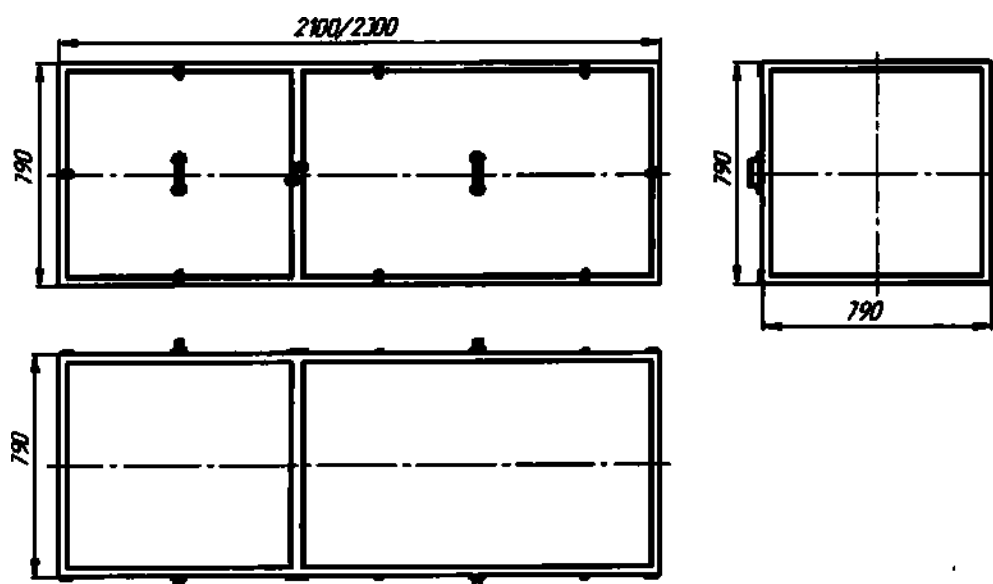


43. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х3000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 790

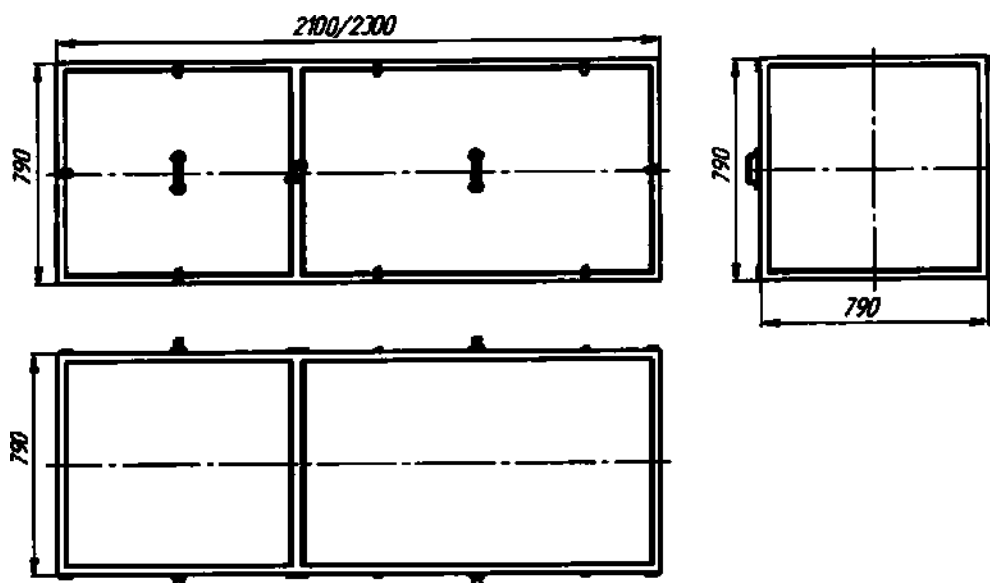


44. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х3000У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 1450 x 980 x 420

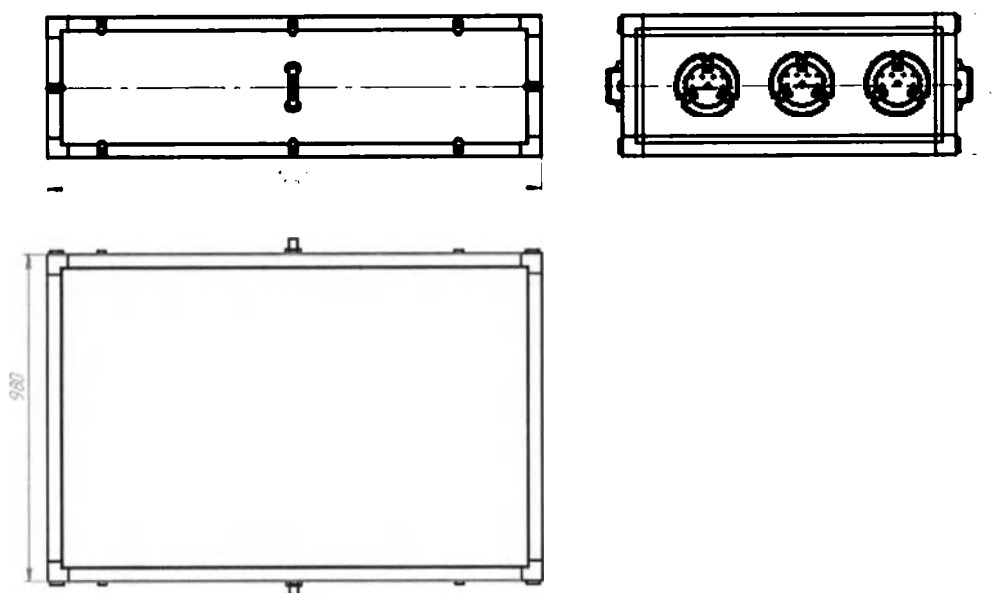


45. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х3000У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 1450 x 700 x 710

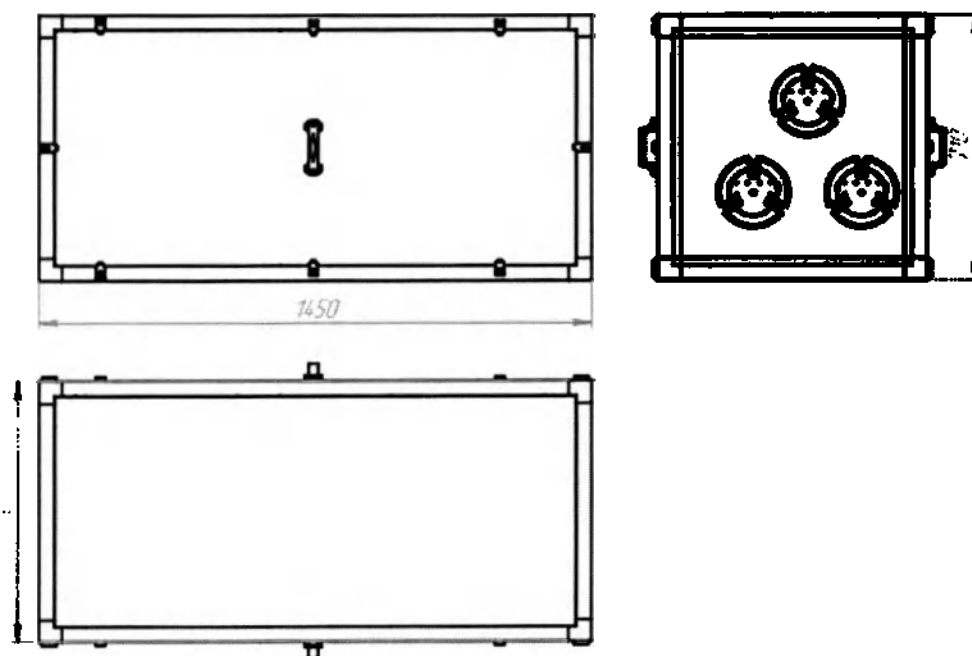


46. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 490

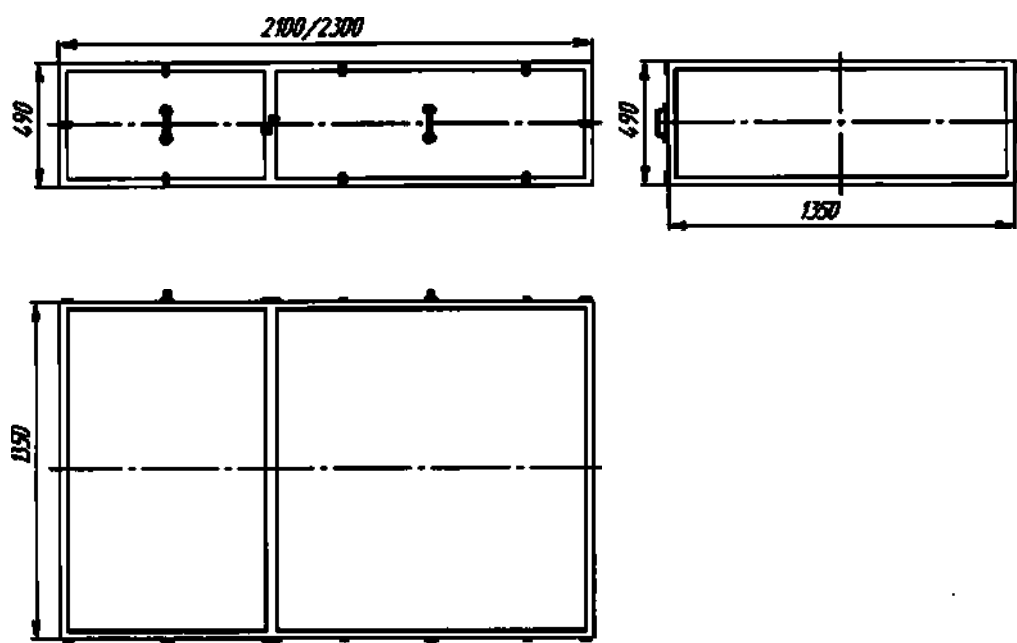


47. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 490

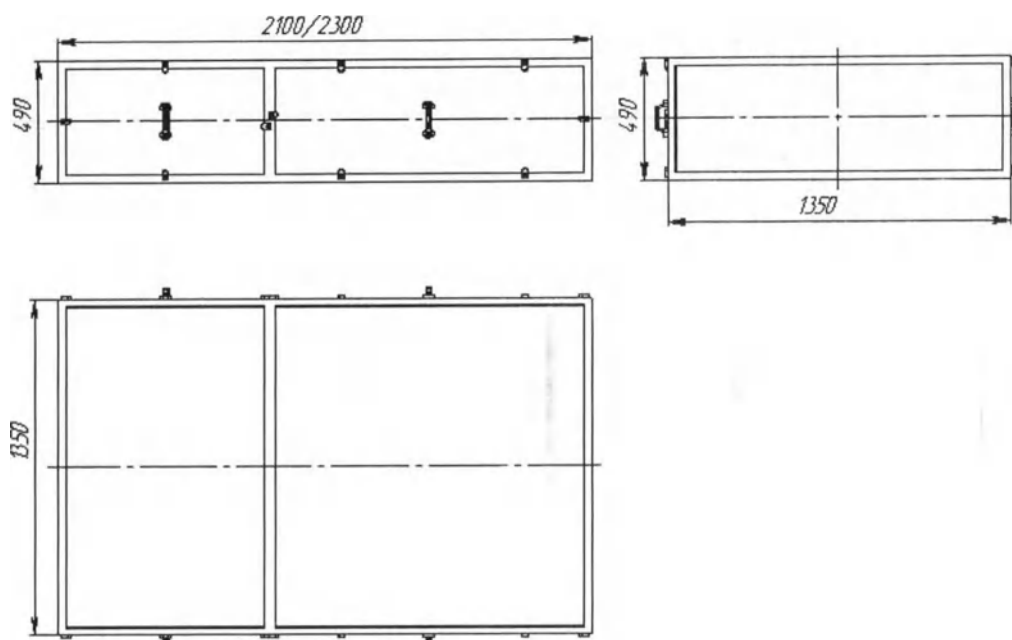


48. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 490 x 1350

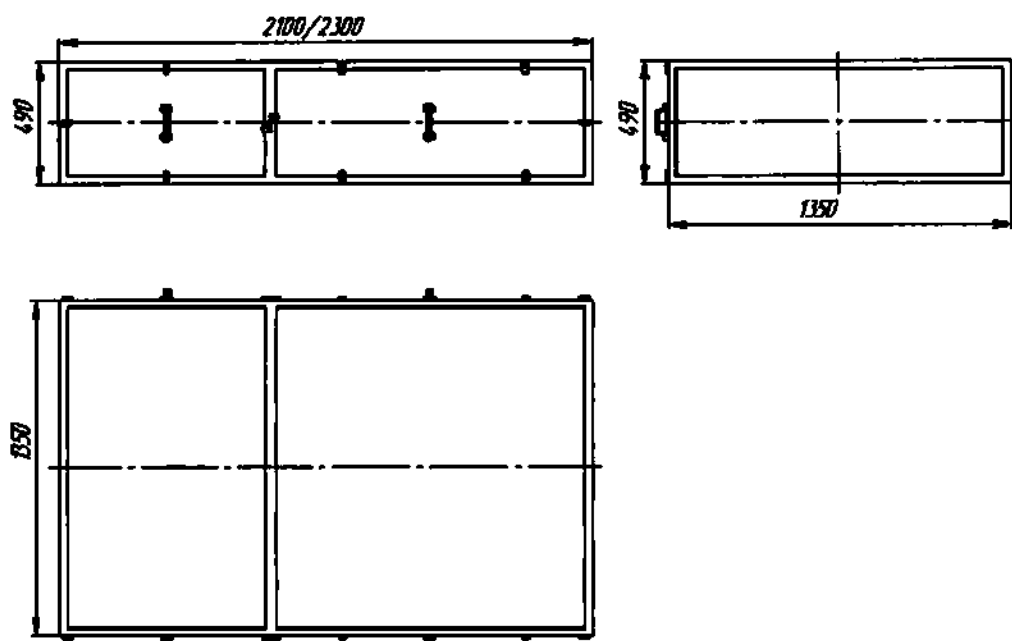


49. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 490 x 1350

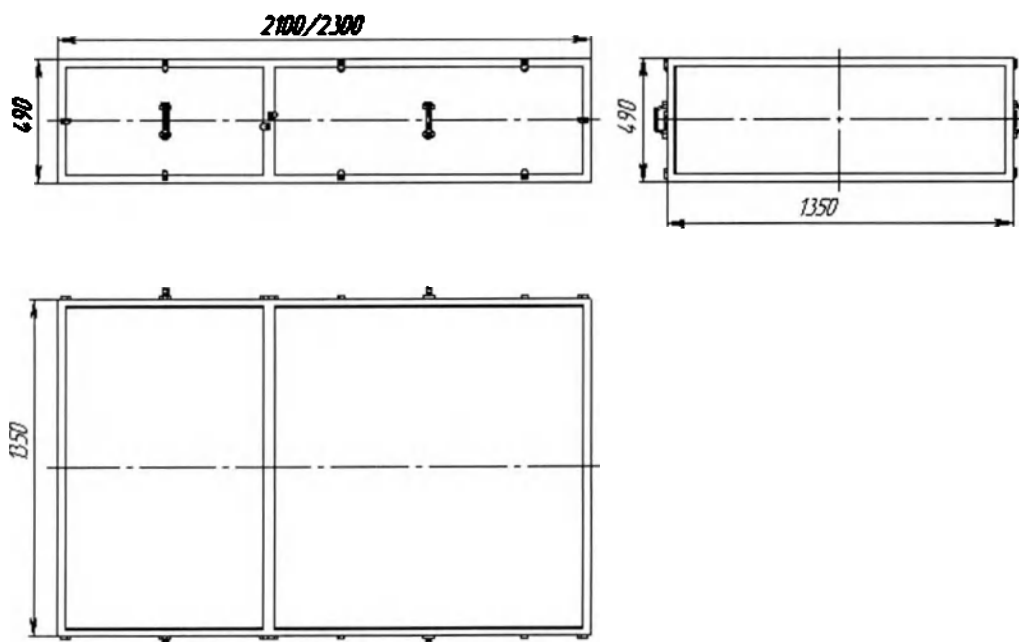


50. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 790

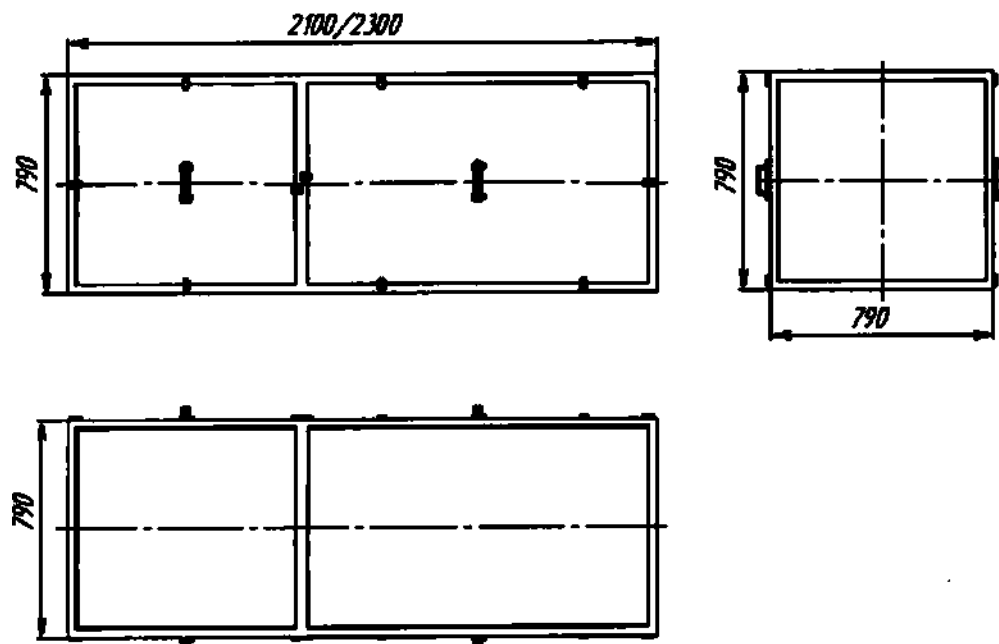


51. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х4000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 790

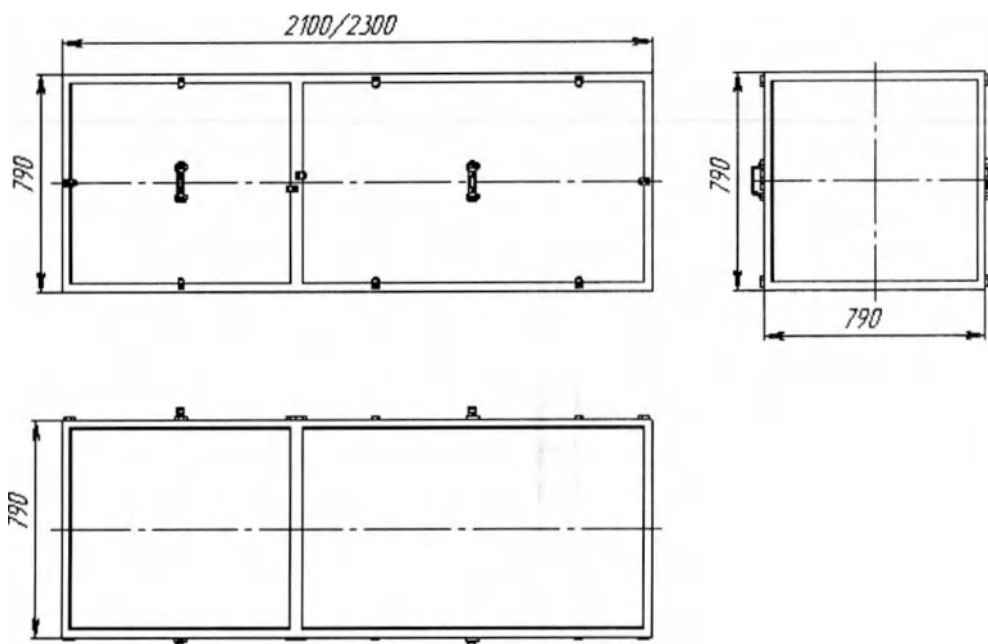


52. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х4000У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 1450 x 1260 x 420

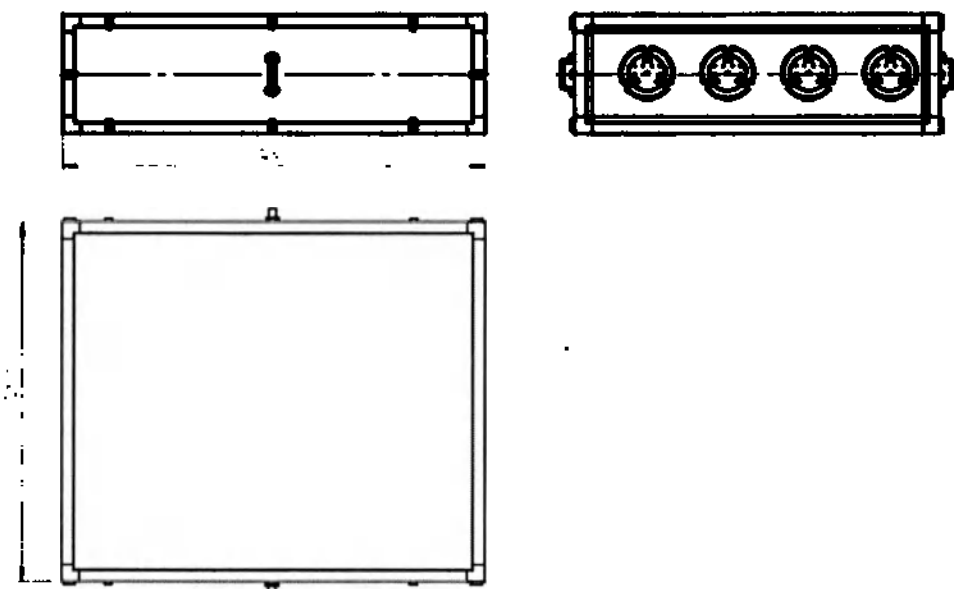


53. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х4000У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 1450 x 700 x 710

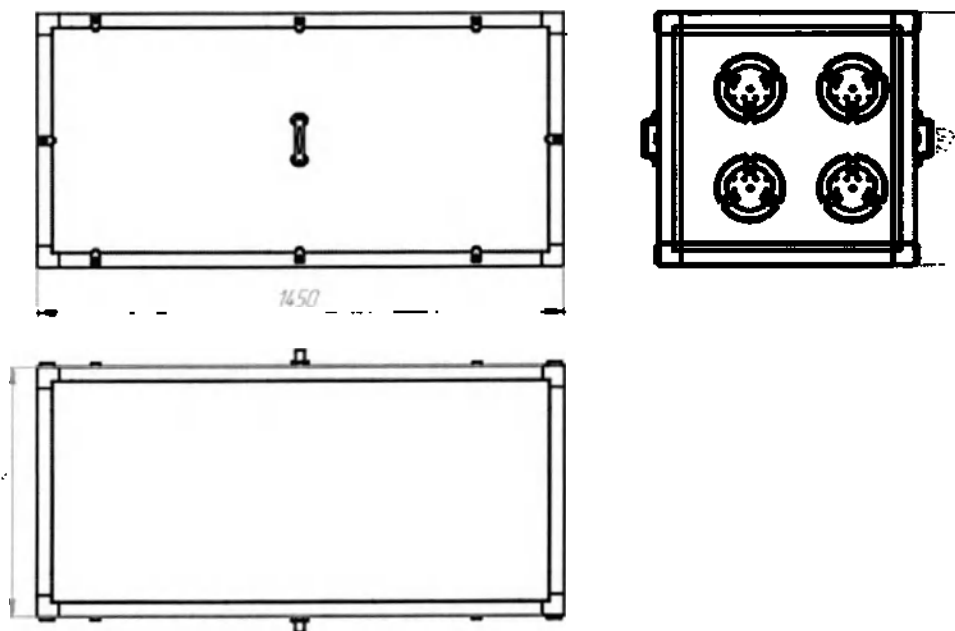


54. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 790

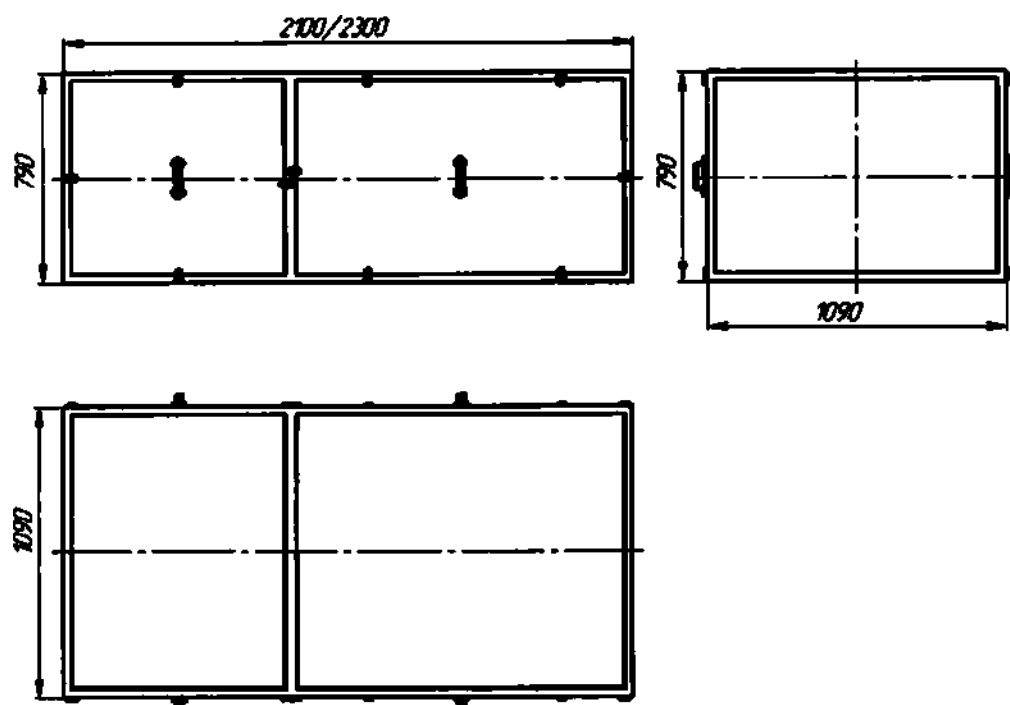


55. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 790

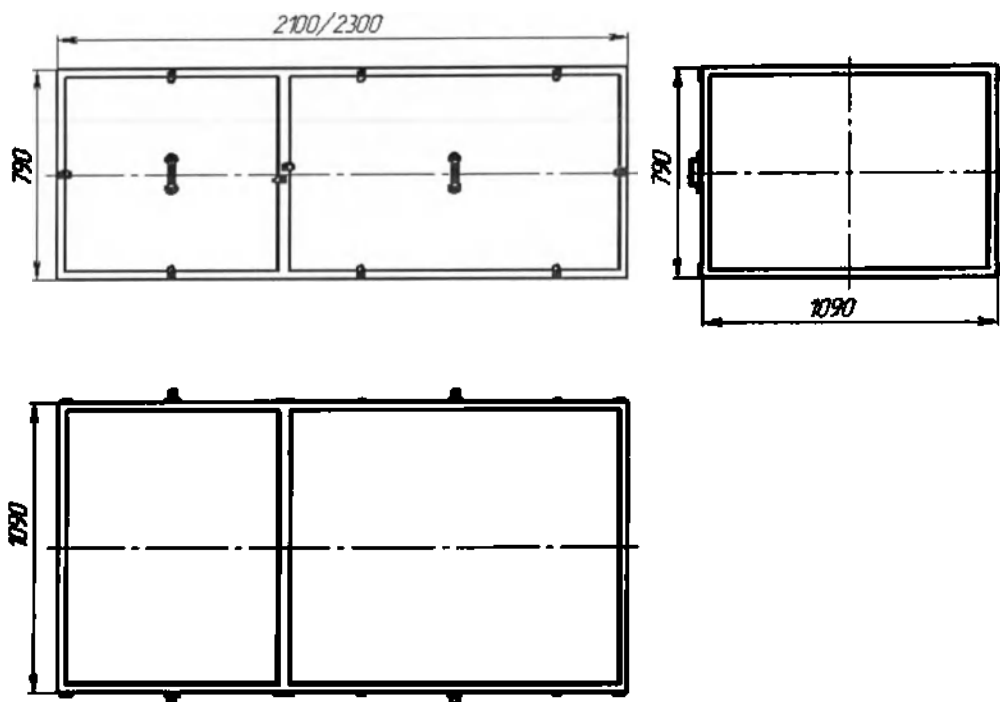


56. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 1090

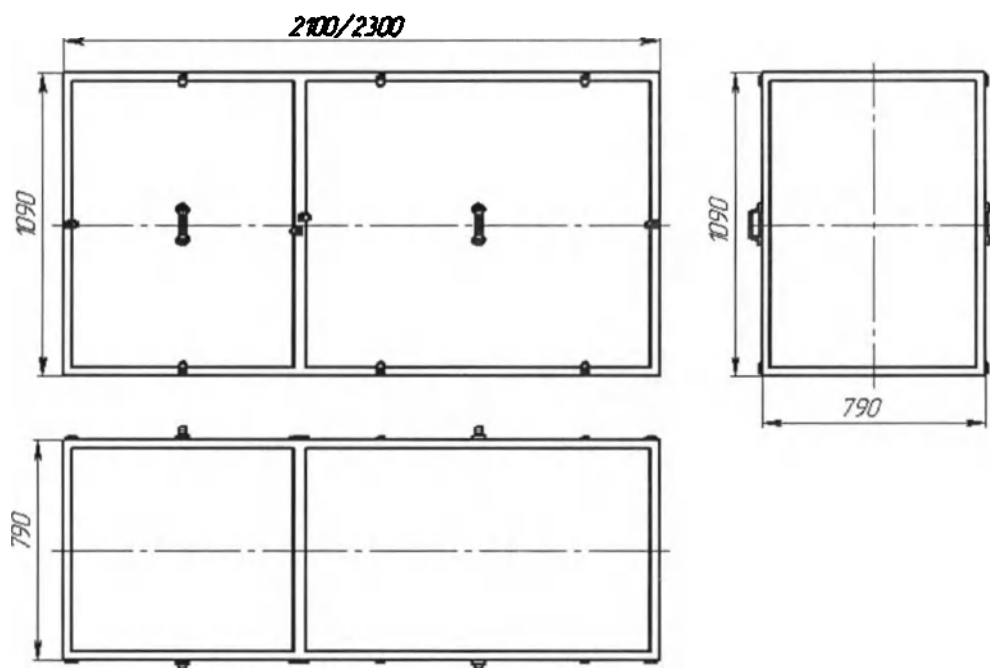


57. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х6000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 1090

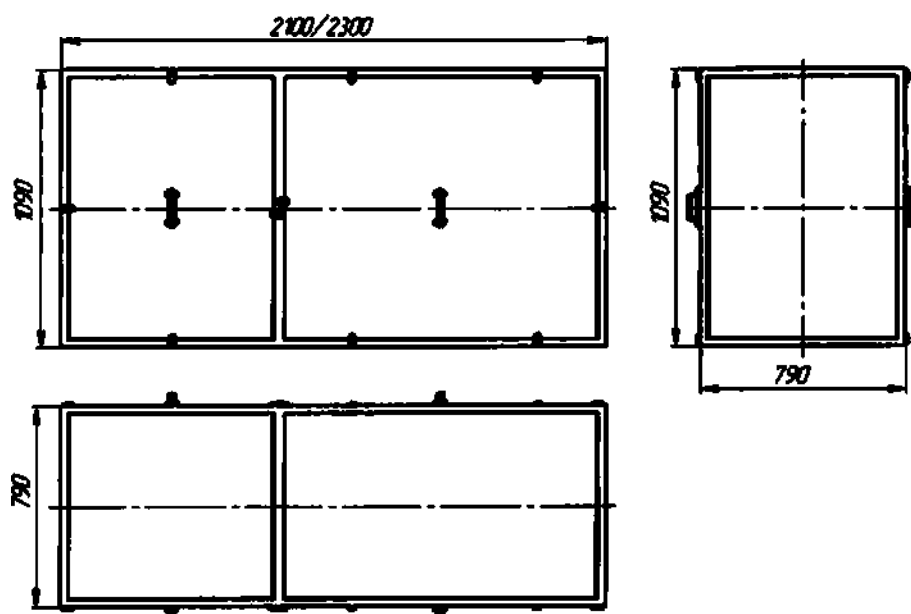


58. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х6000У исп. 1, размер (Д x Ш x В) 1450 x 980 x 710

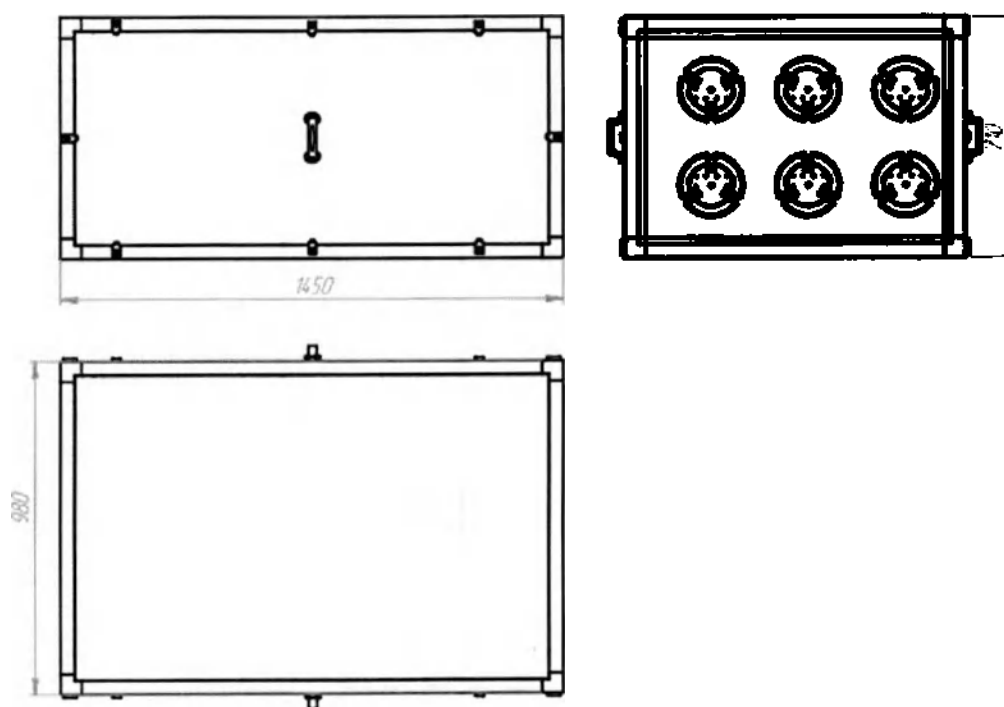


59. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х6000У исп. 2, размер (Д x Ш x В) 1450 x 700 x 990

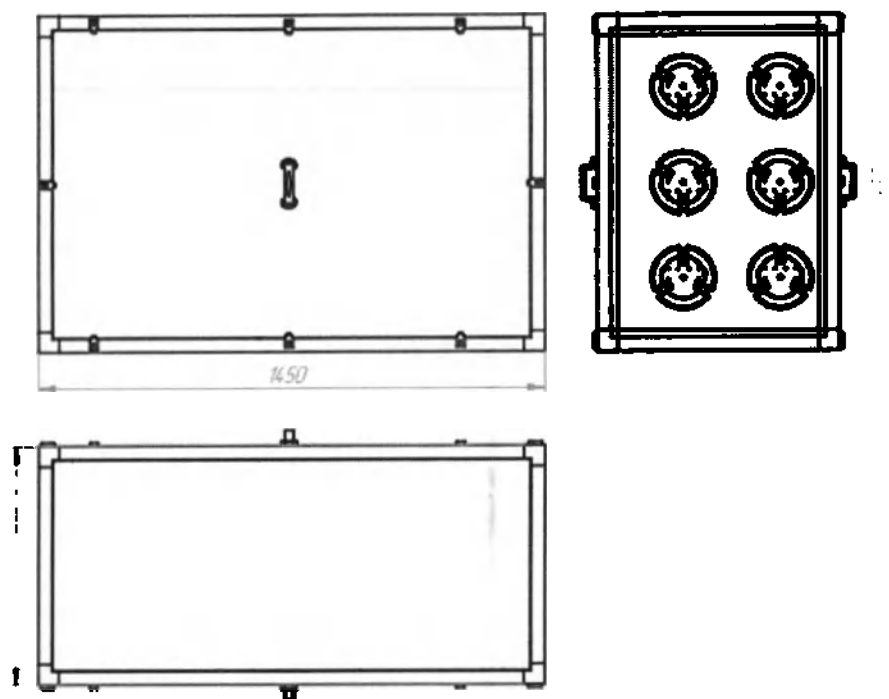


60. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 790 x 1350

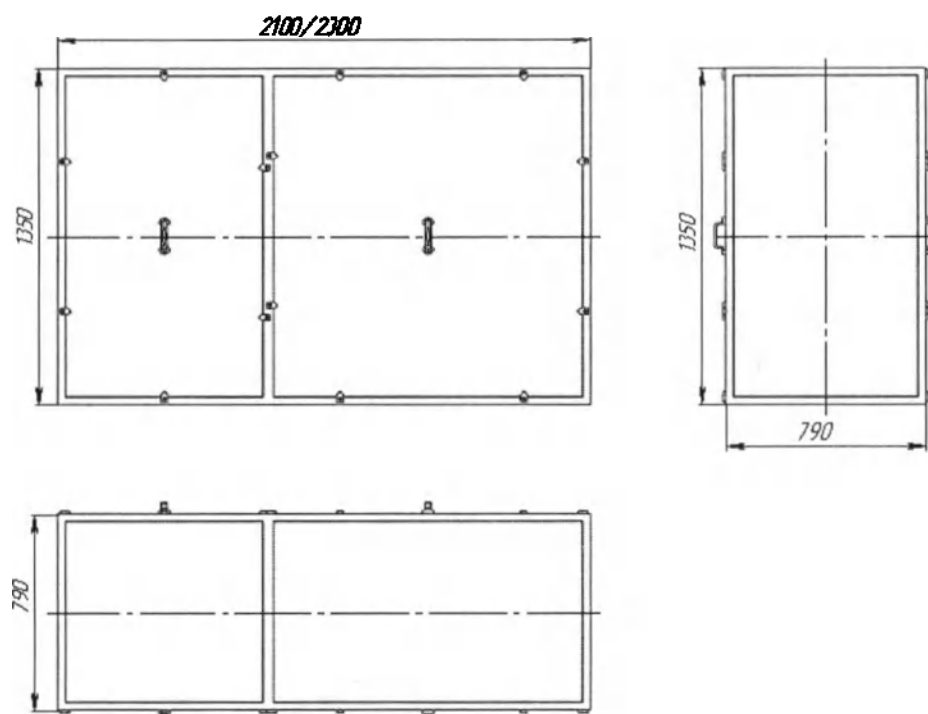


61. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 790 x 1350

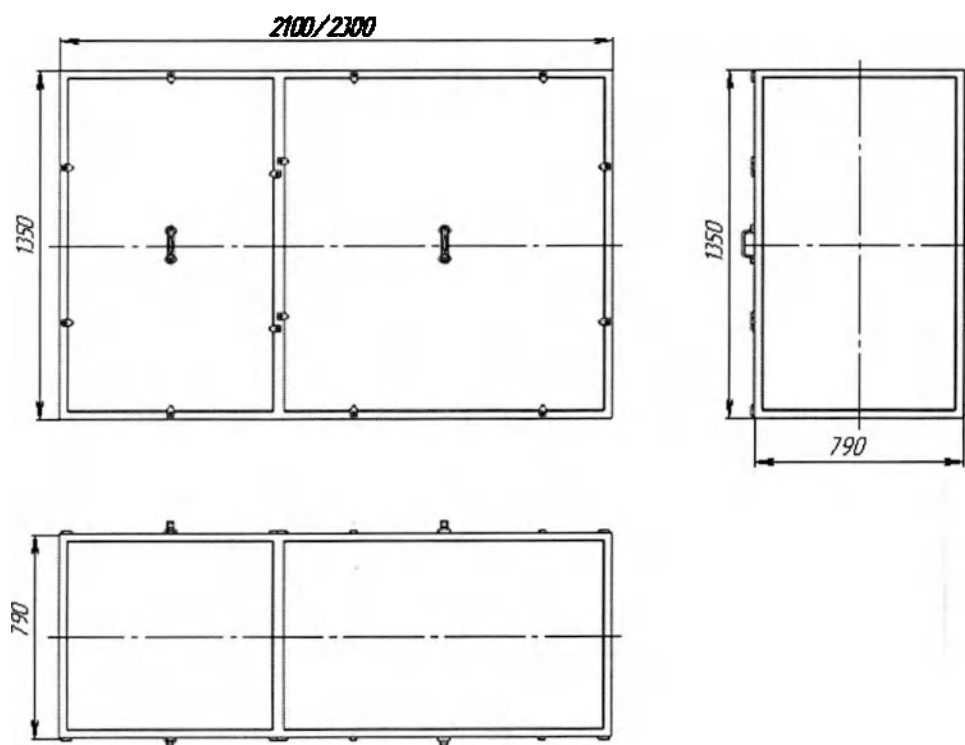


62. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 790

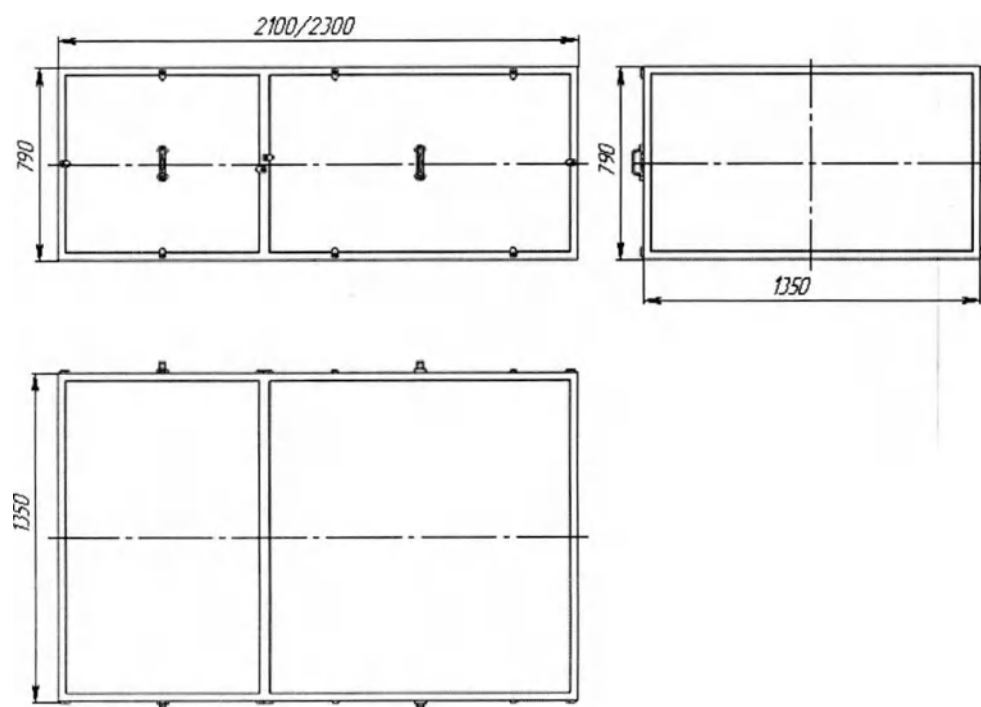


63. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 790

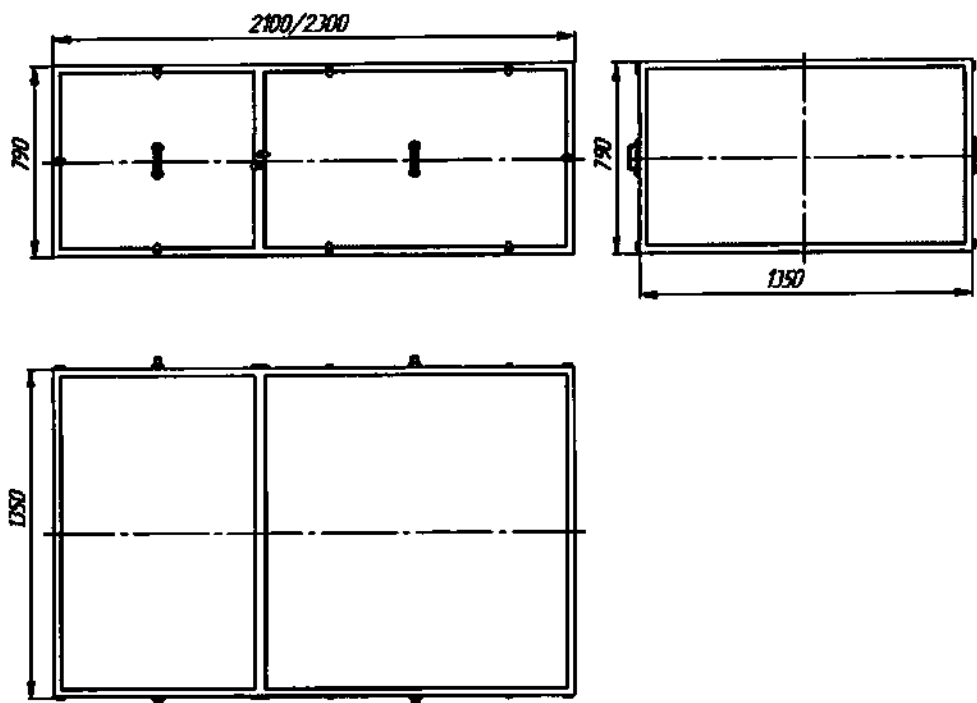


64. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1090

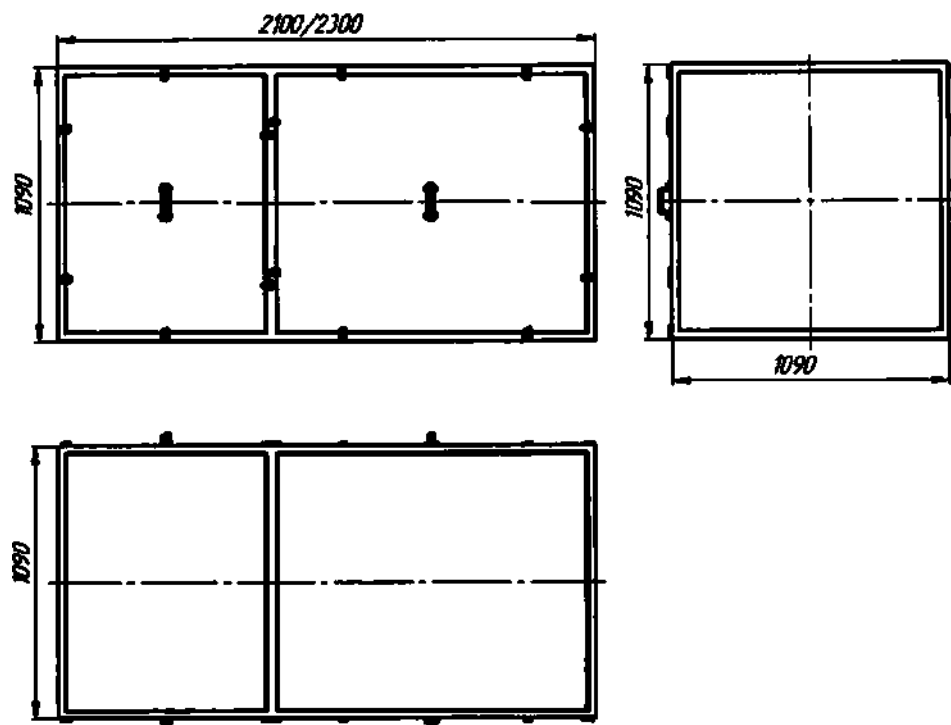


65. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х8000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1090

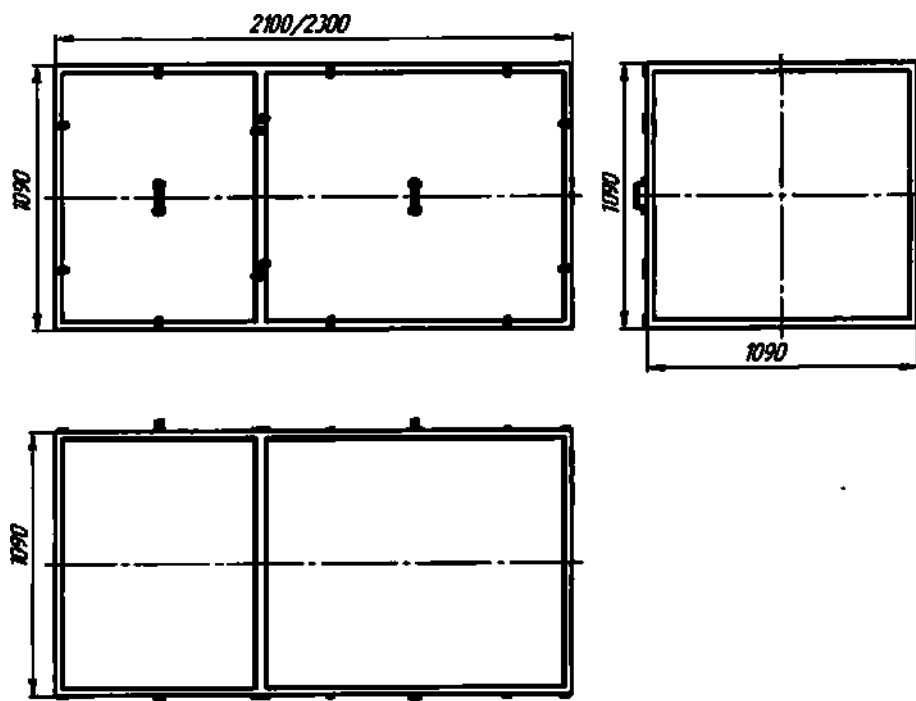


66. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х9000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1090

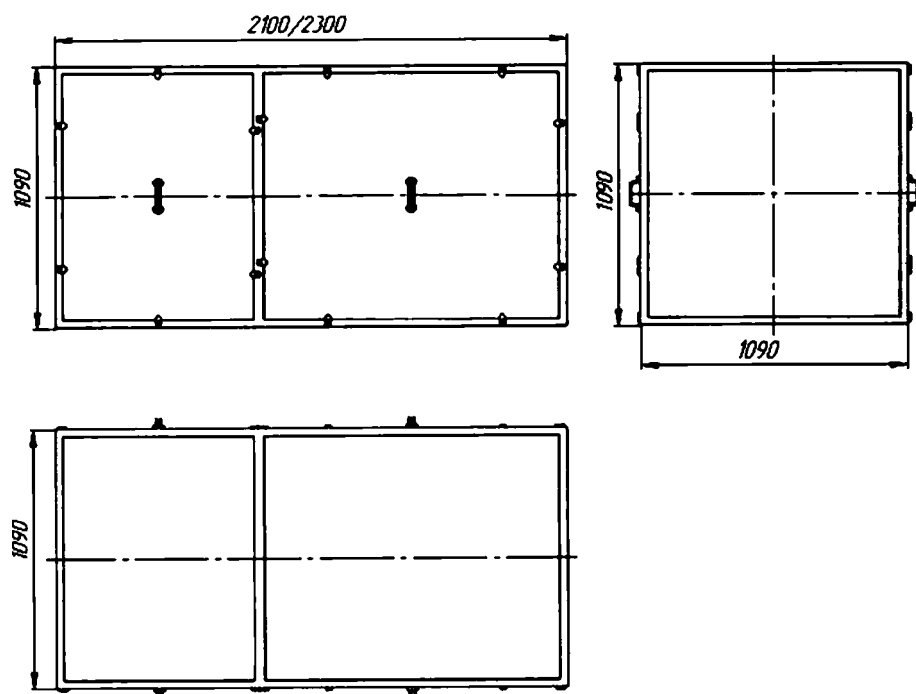


67. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х9000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1090

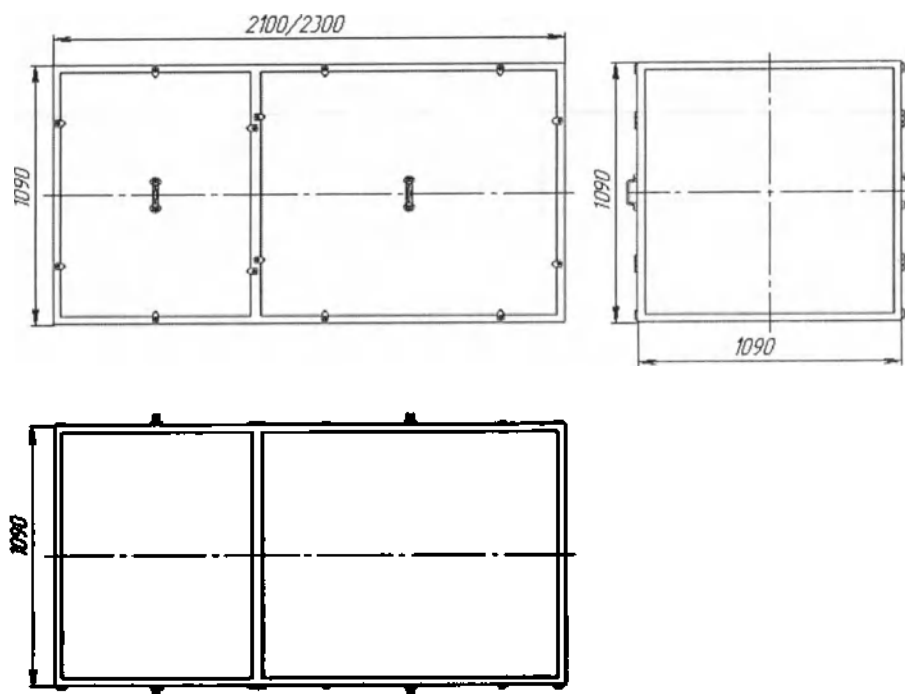


68. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х9000У, размер (Д x Ш x В) 1450 x 980 x 990

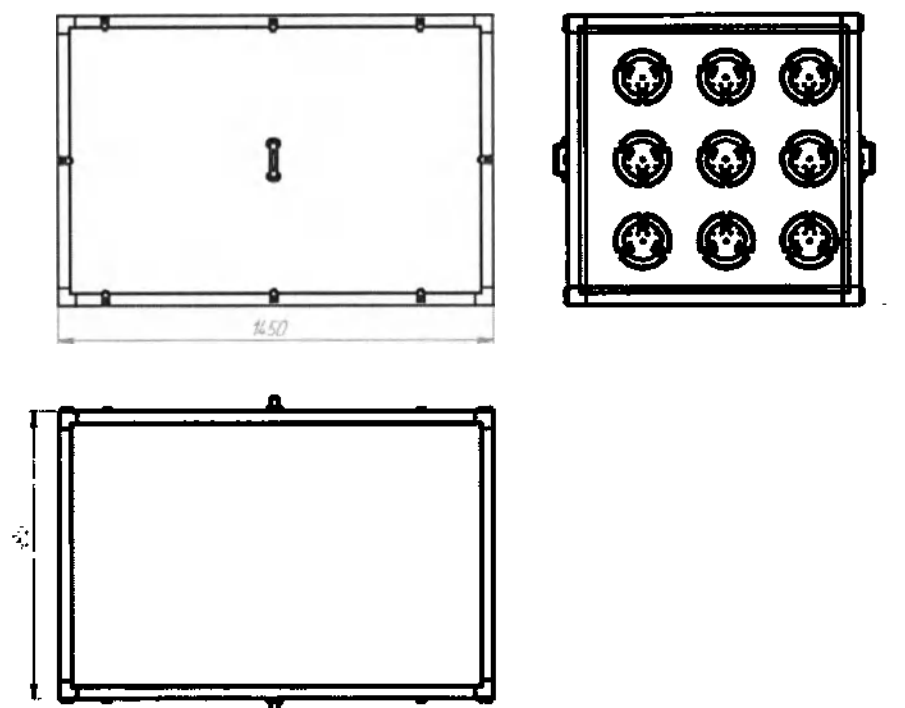


69. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1350

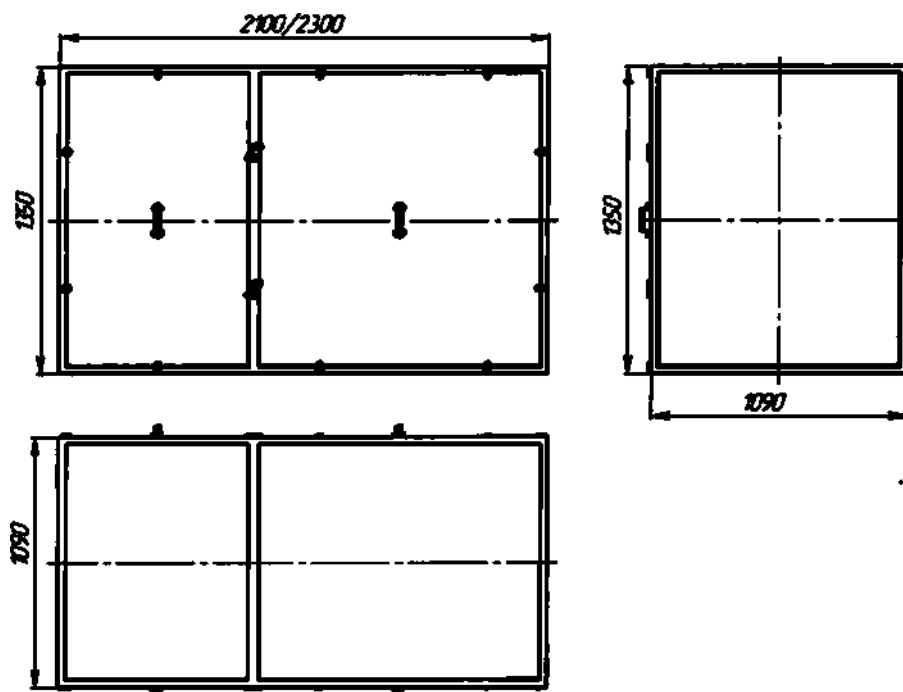


70. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1350

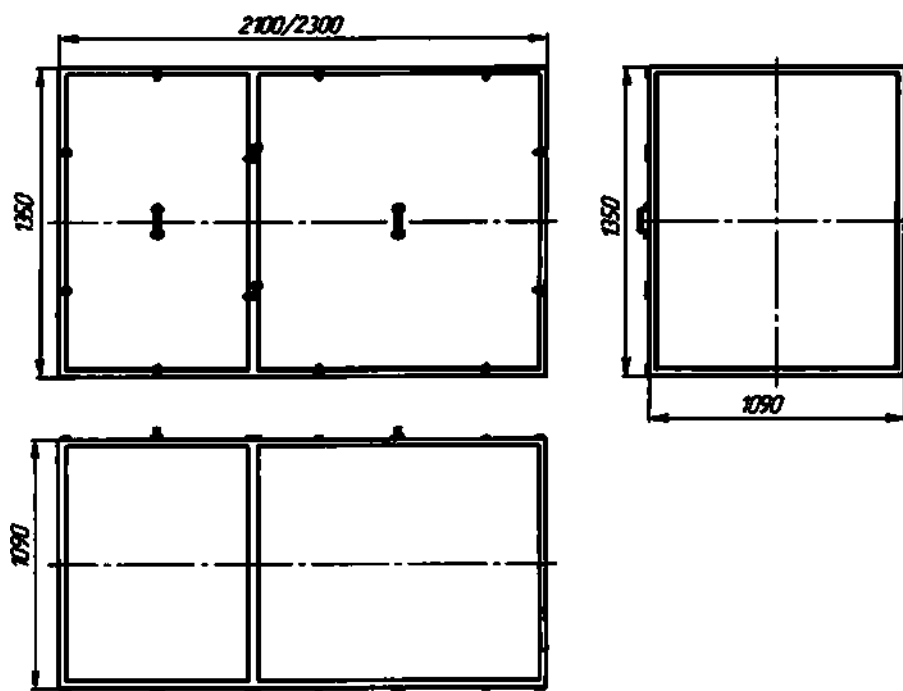


71. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 1090

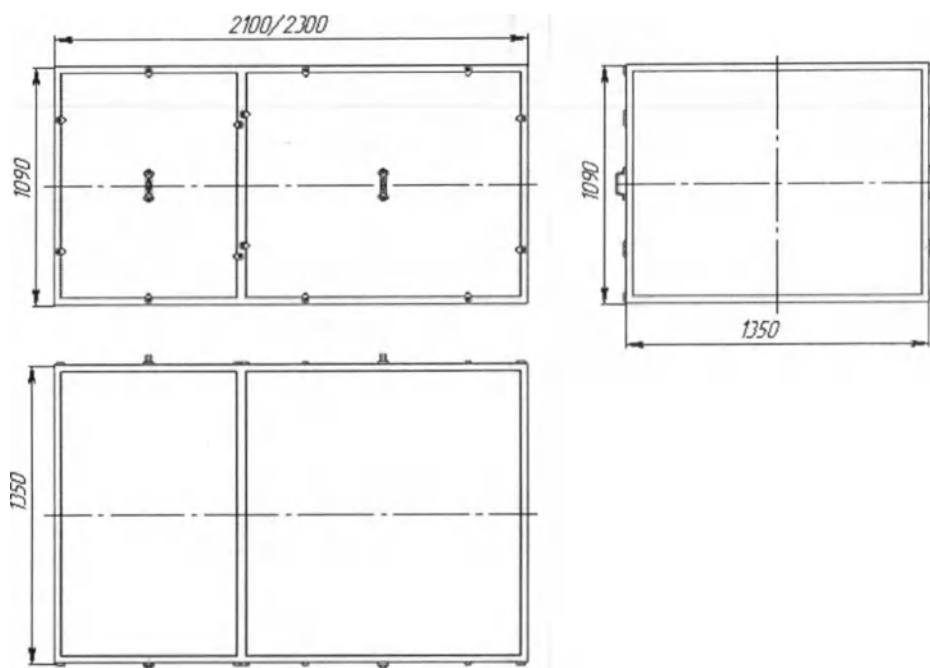


72. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 1090

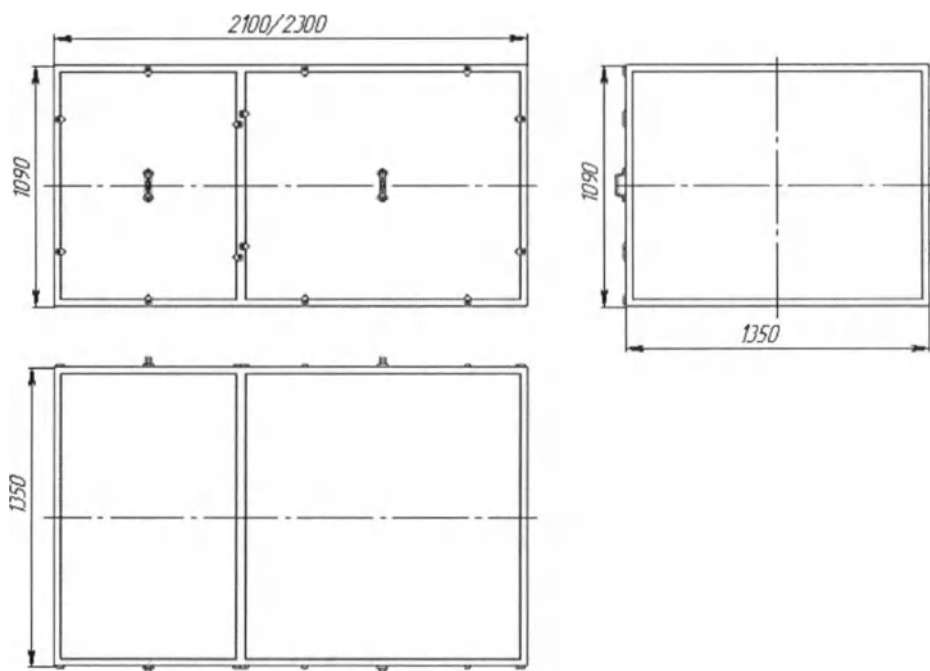


73. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 1580

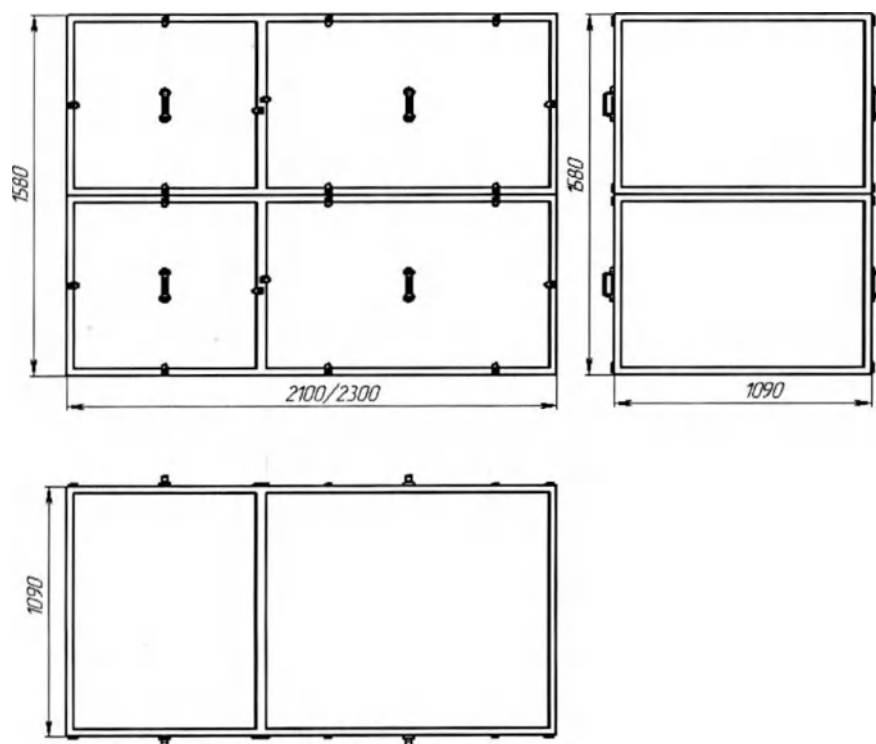


74. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 1580

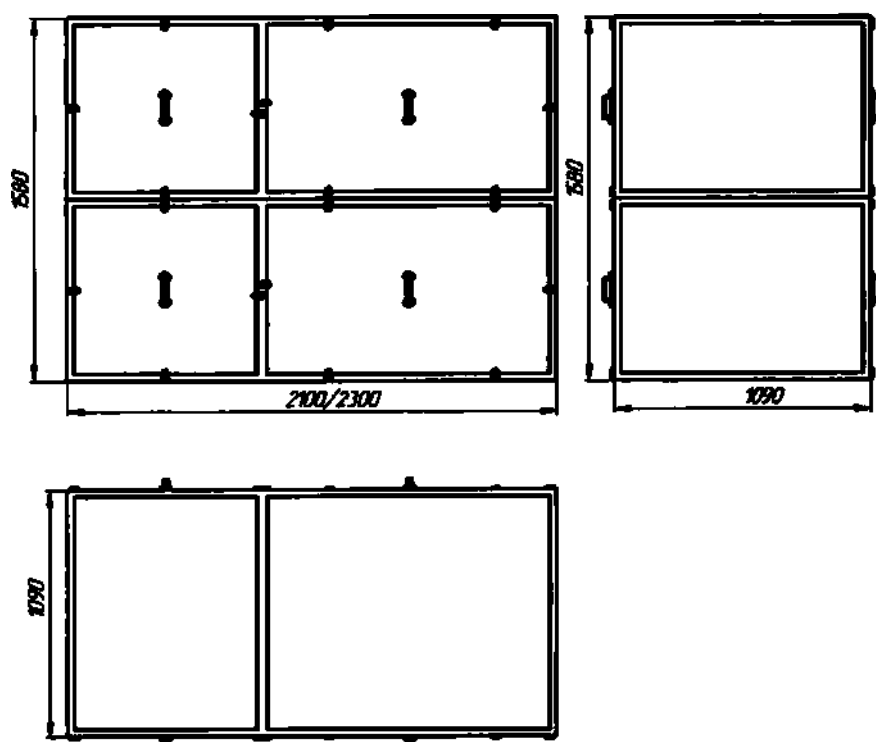


75. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 1090

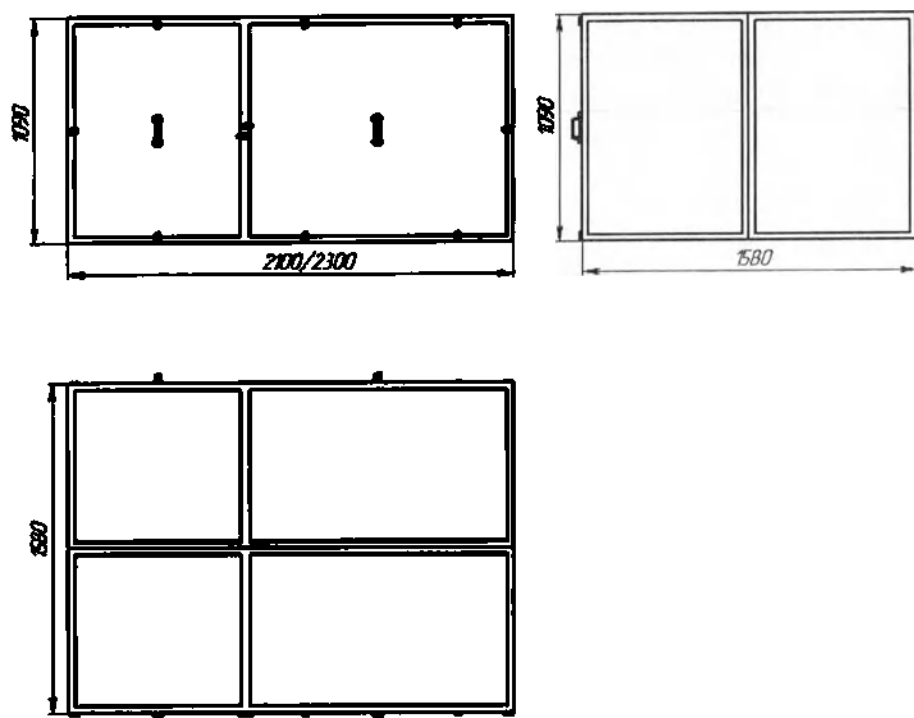


76. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х12000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 1090

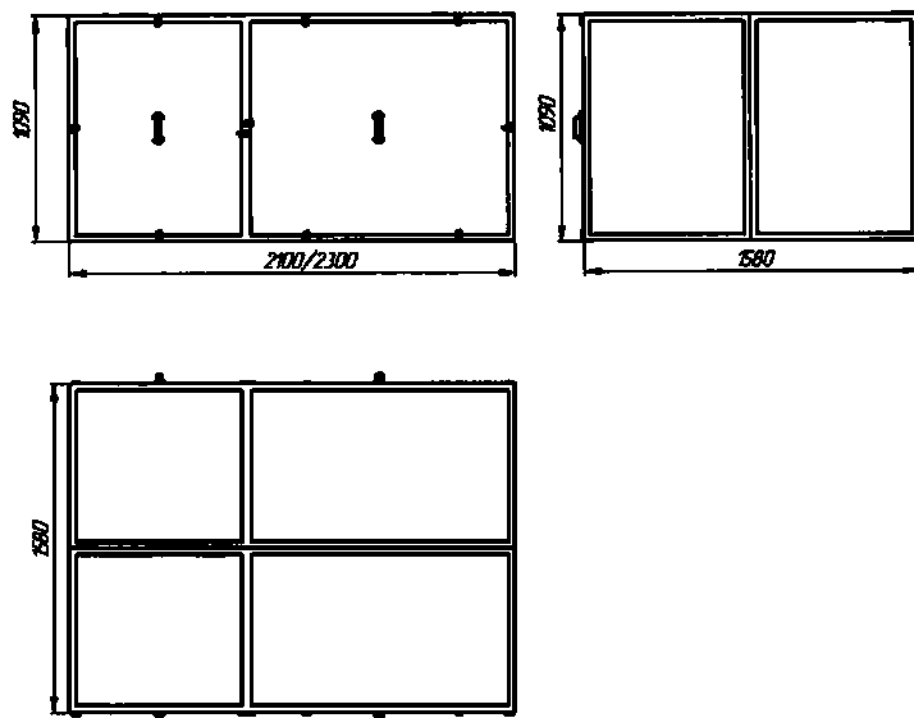


77. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 1580

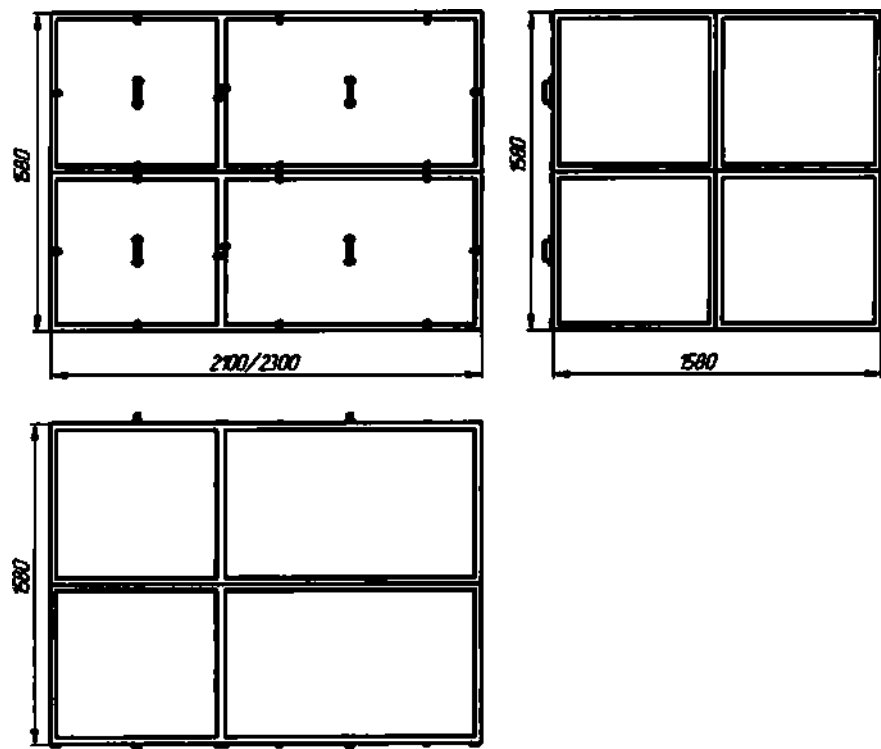


78. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 1580

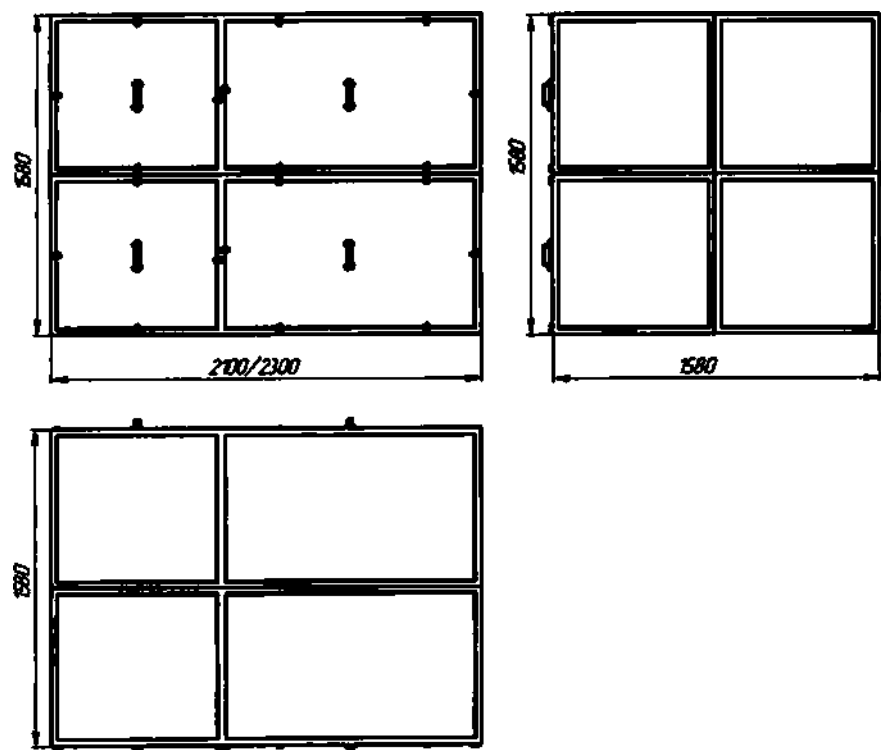


79. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 1350

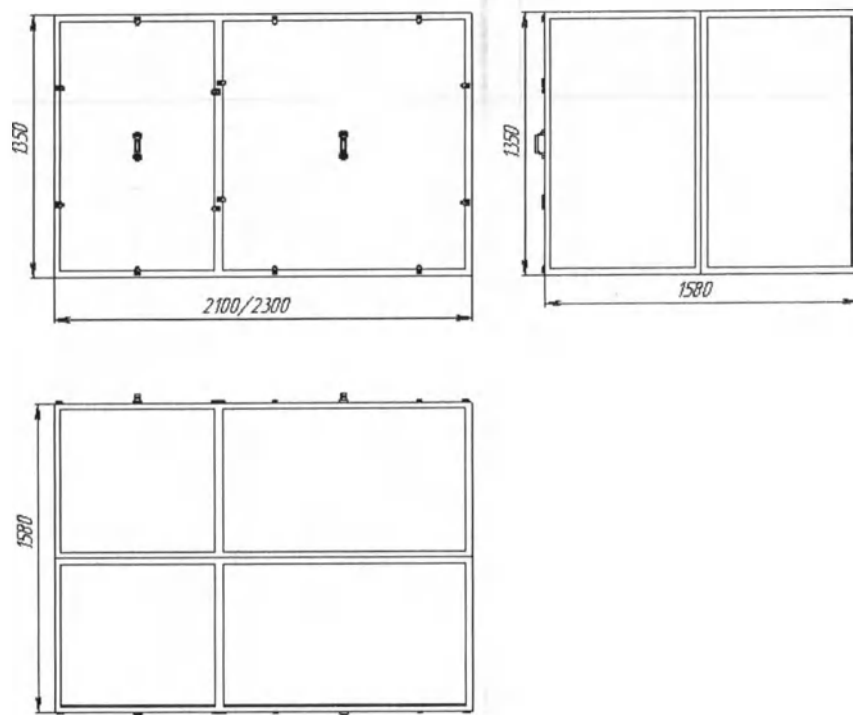


80. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 1350

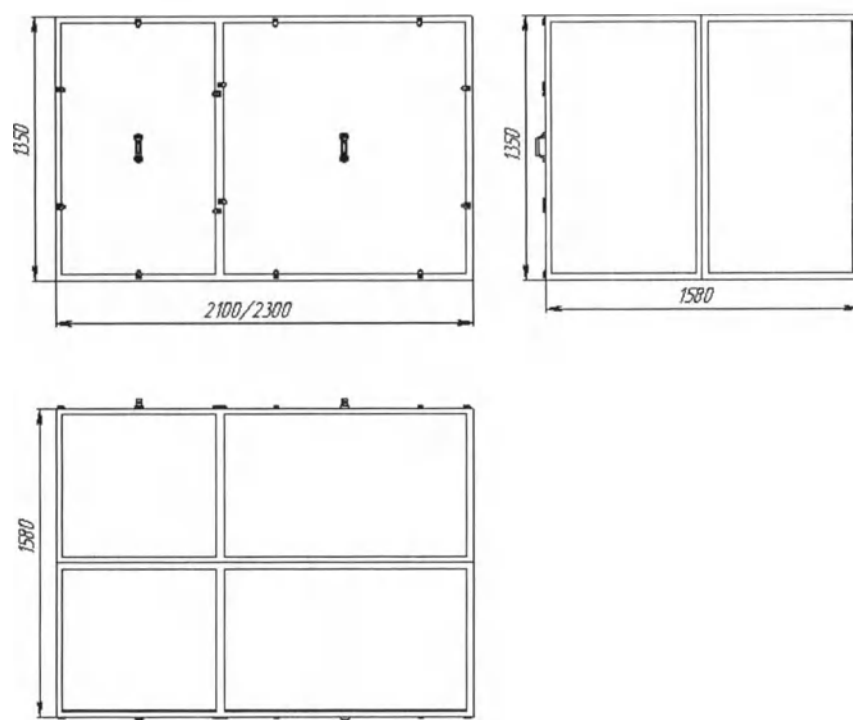


81. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1350 x 1580

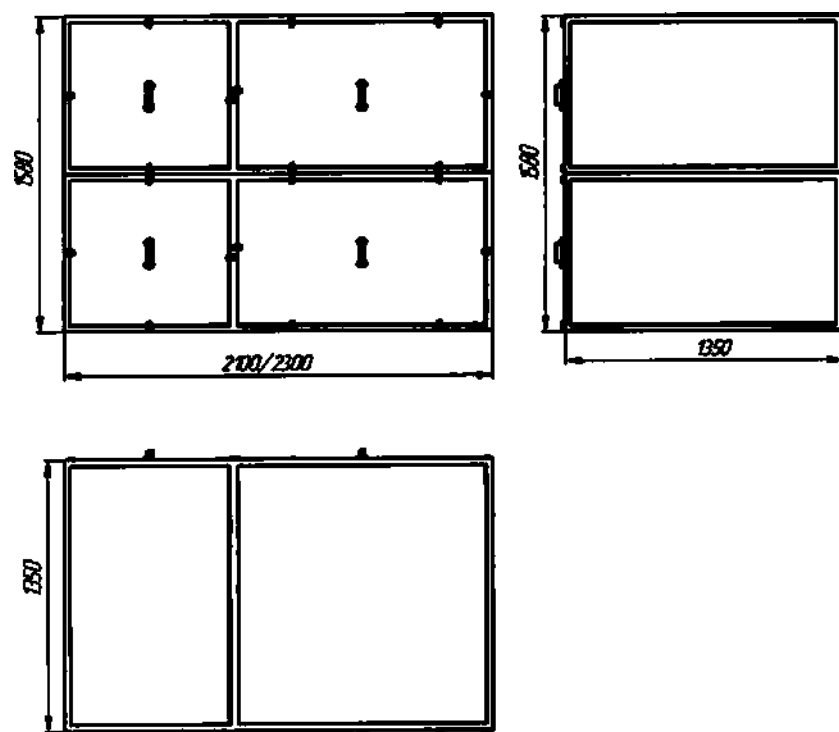


82. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х16000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1350 x 1580

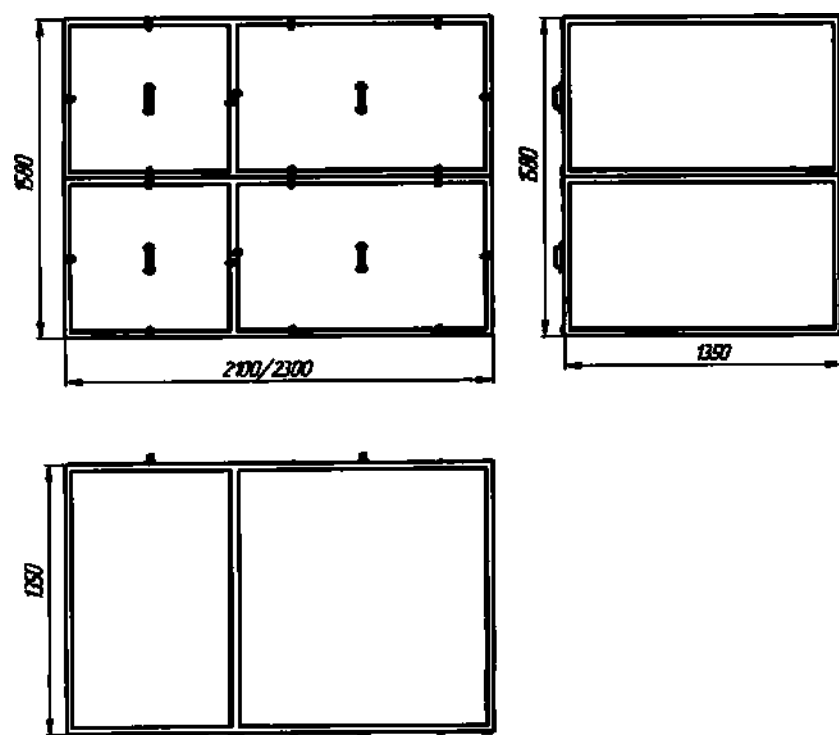


83. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1090 x 2180

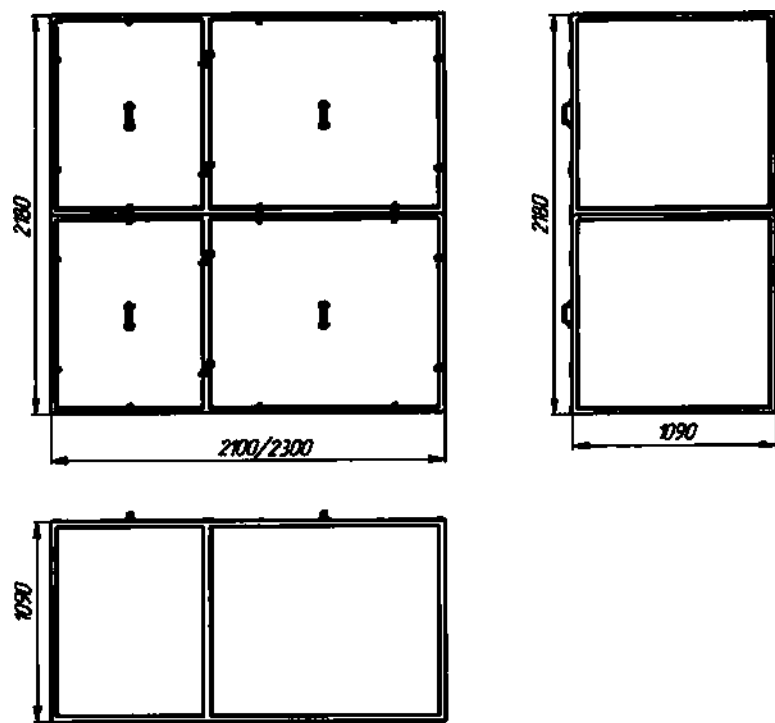


84. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1090 x 2180

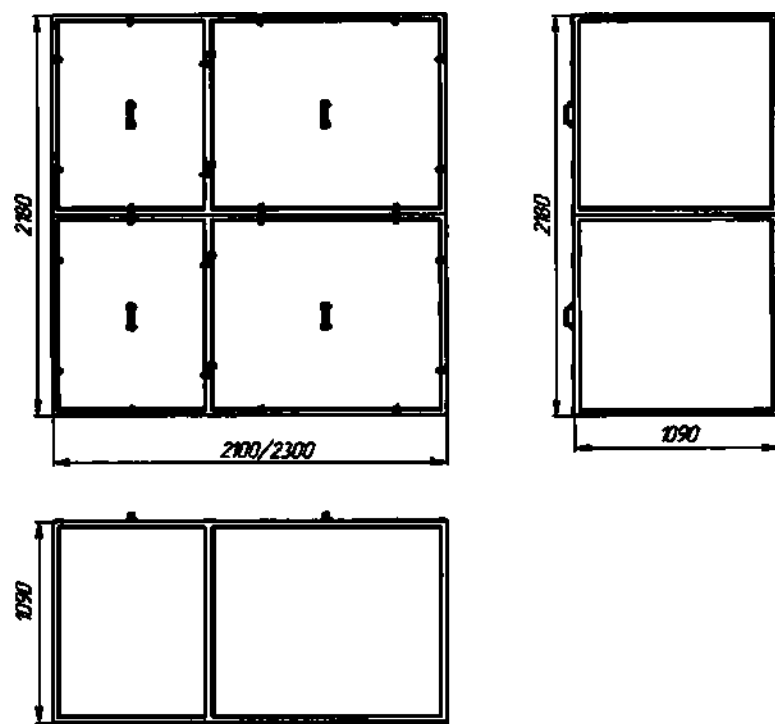


85. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 1090

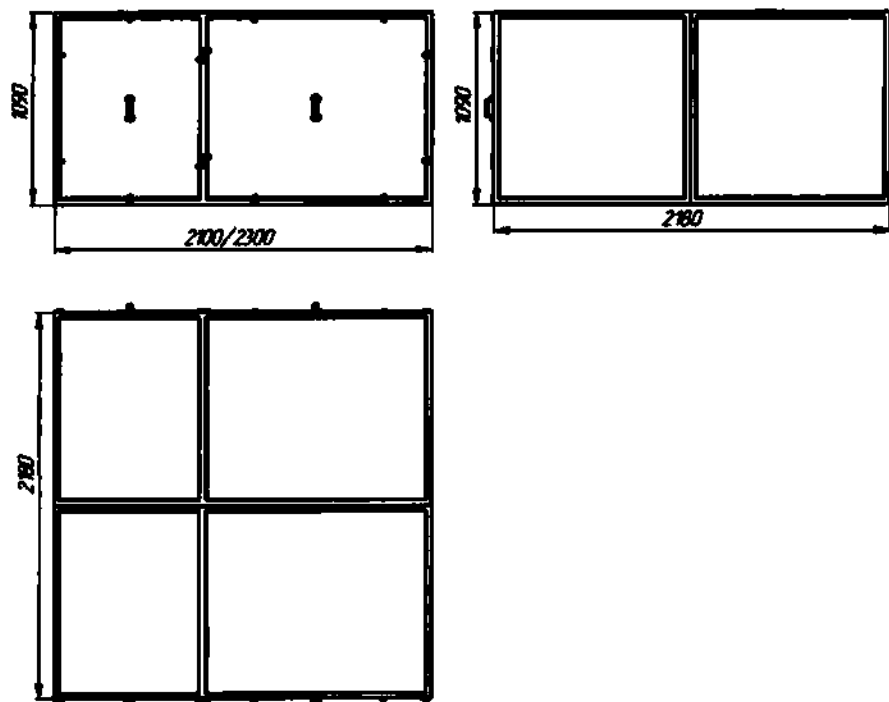


86. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х18000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 1090

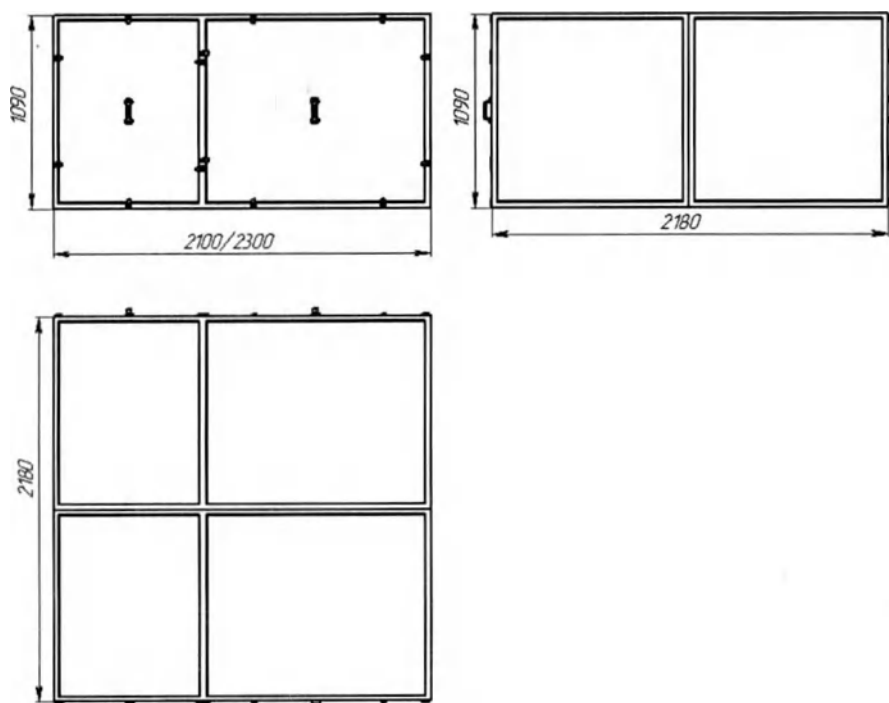


87. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х20000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 1880

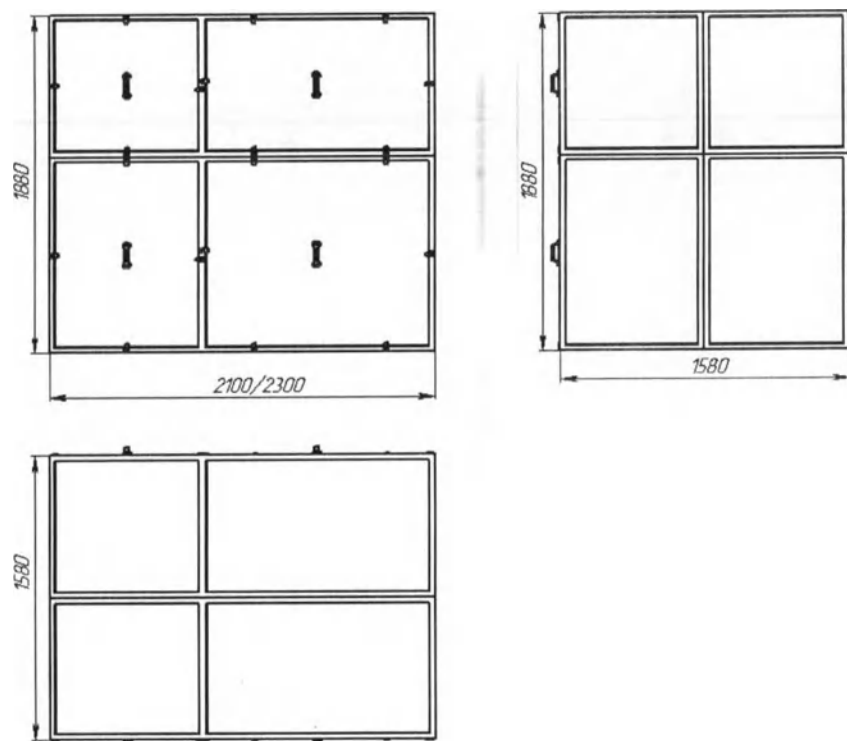


88. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х20000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 1880

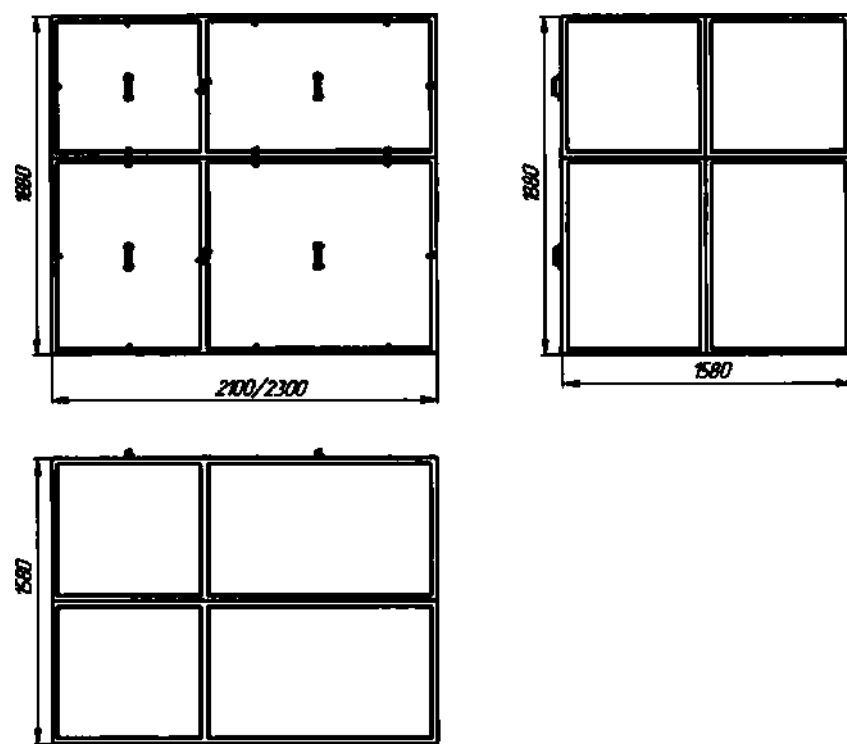


89. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х24000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 1580

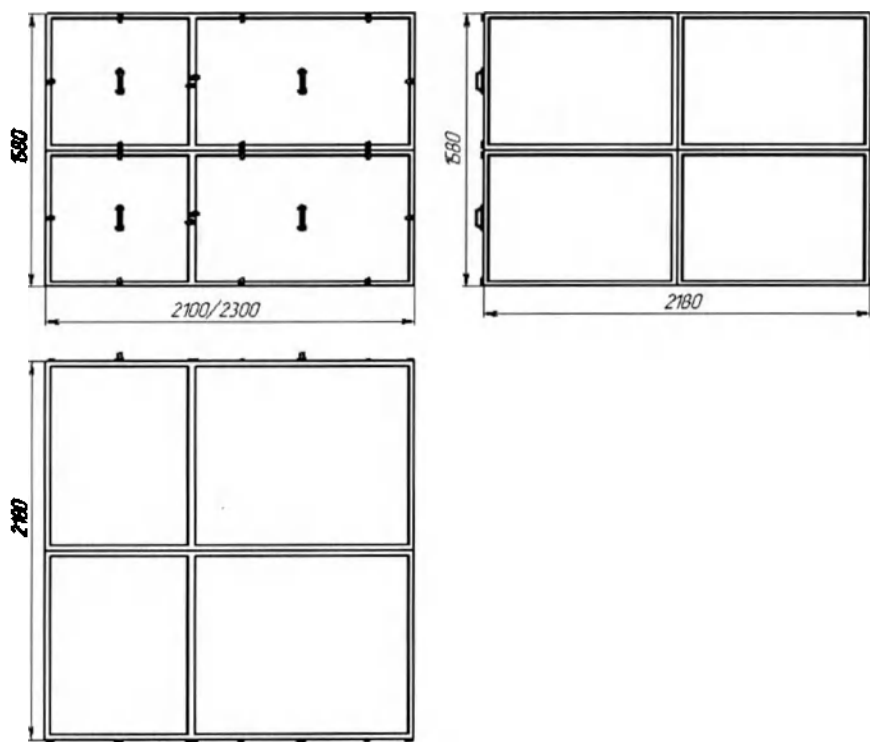


90. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х24000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 1580

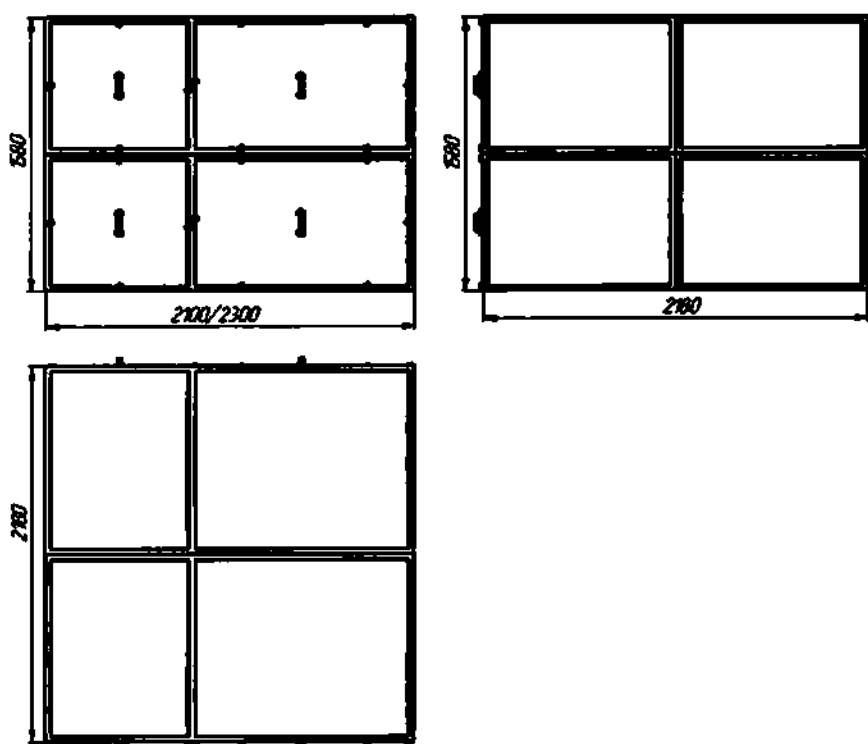


91. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х24000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 1580 x 2180

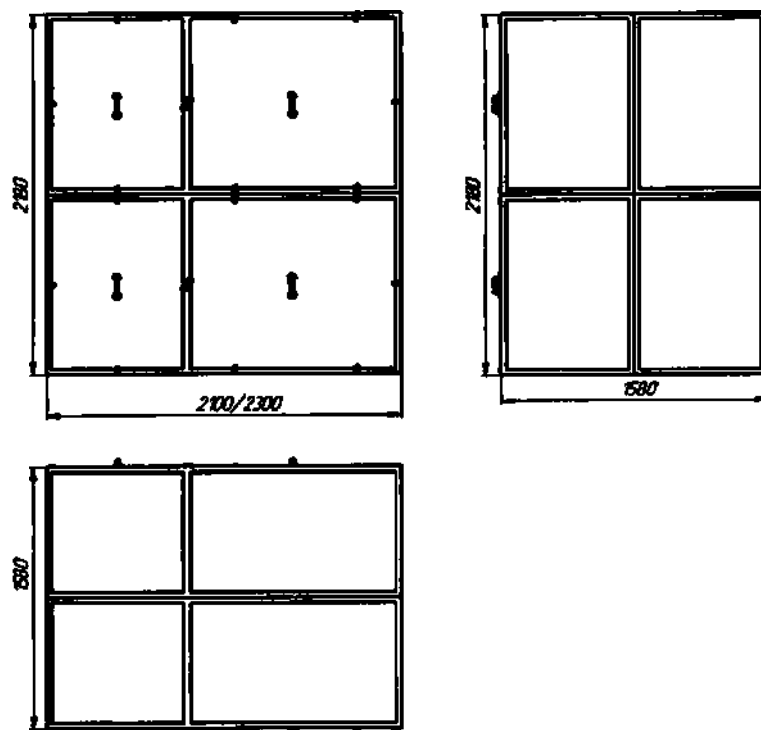


92. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х24000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 1580 x 2180

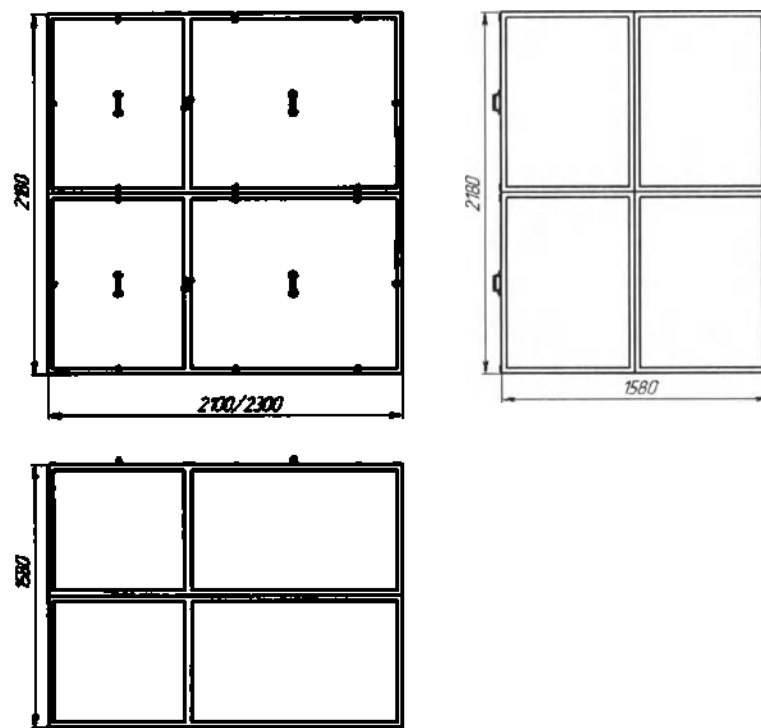


93. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х30000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 1880

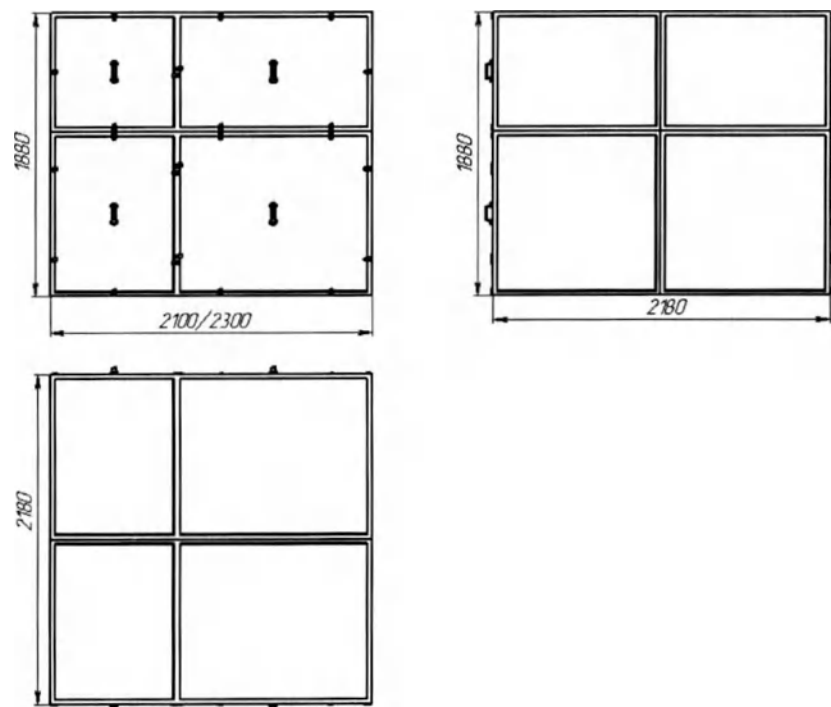


94. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х30000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 1880

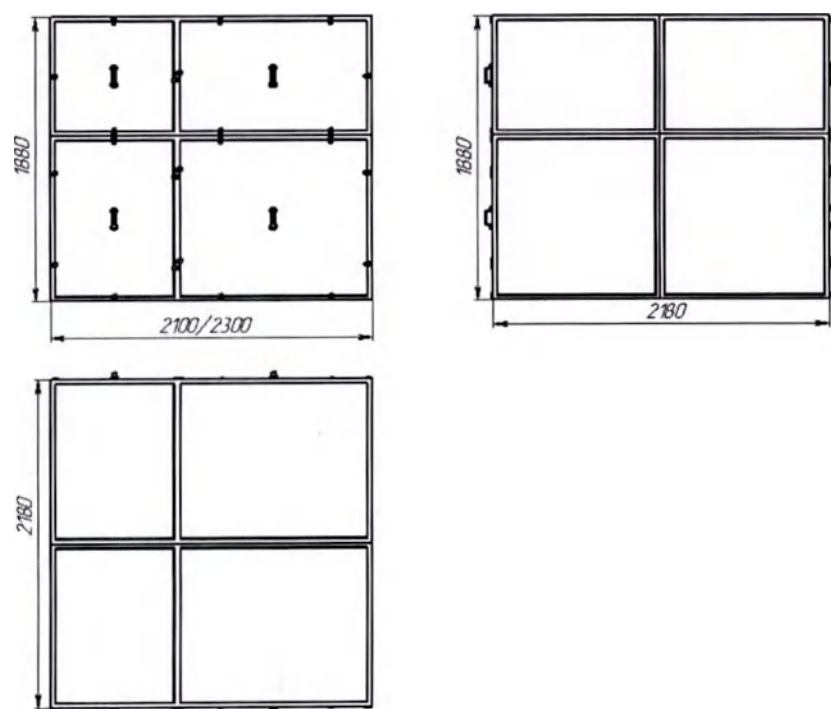


95. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х36000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 2180

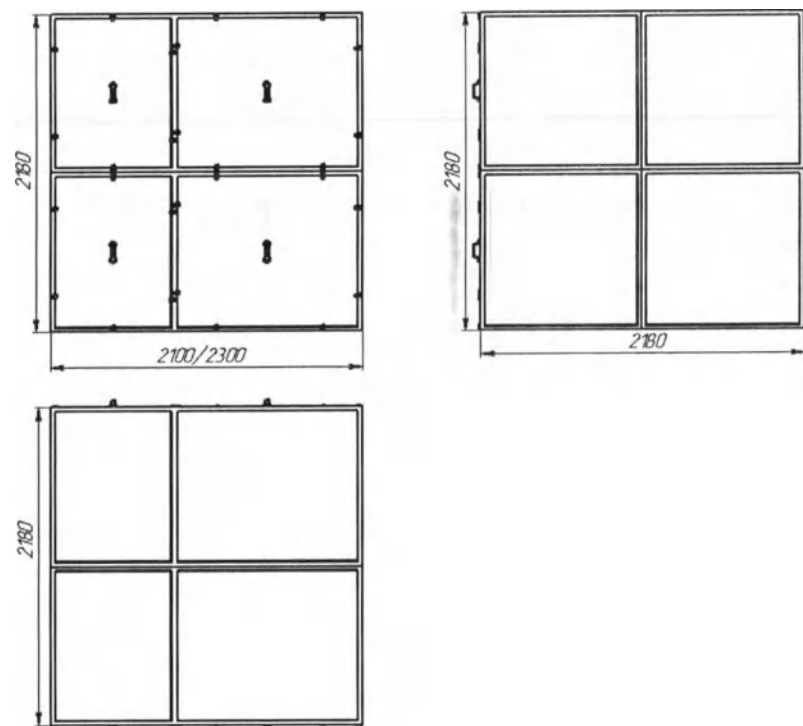


96. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х36000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 2180

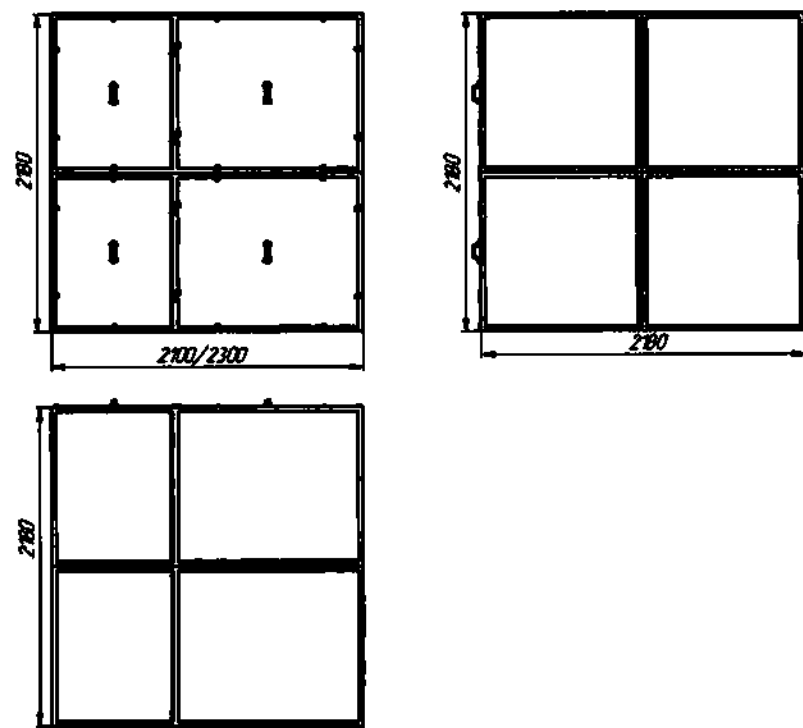


97. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 3160

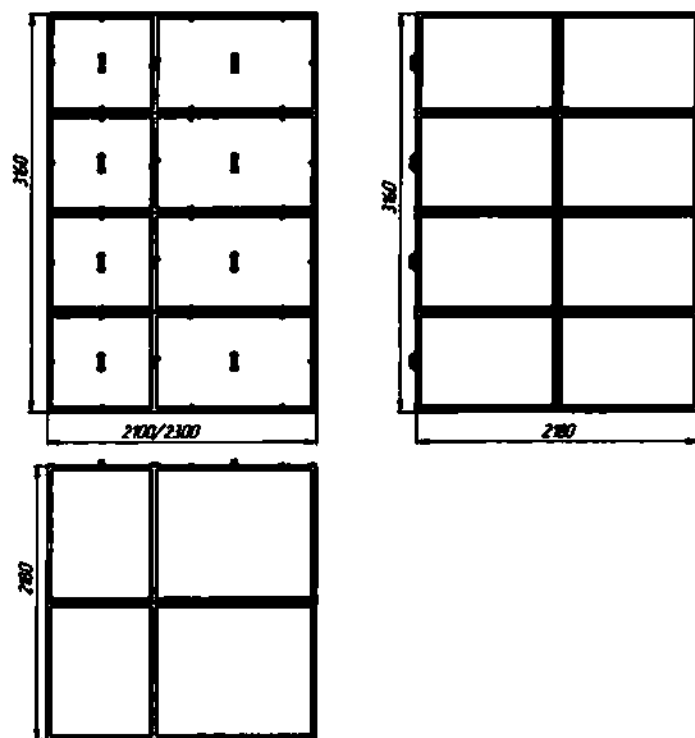


98. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 3160

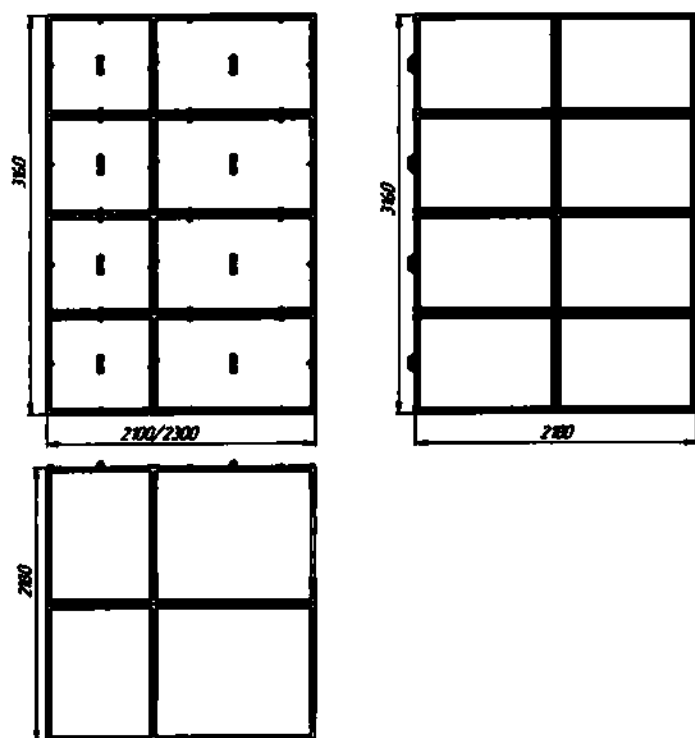


99. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2180 x 3160

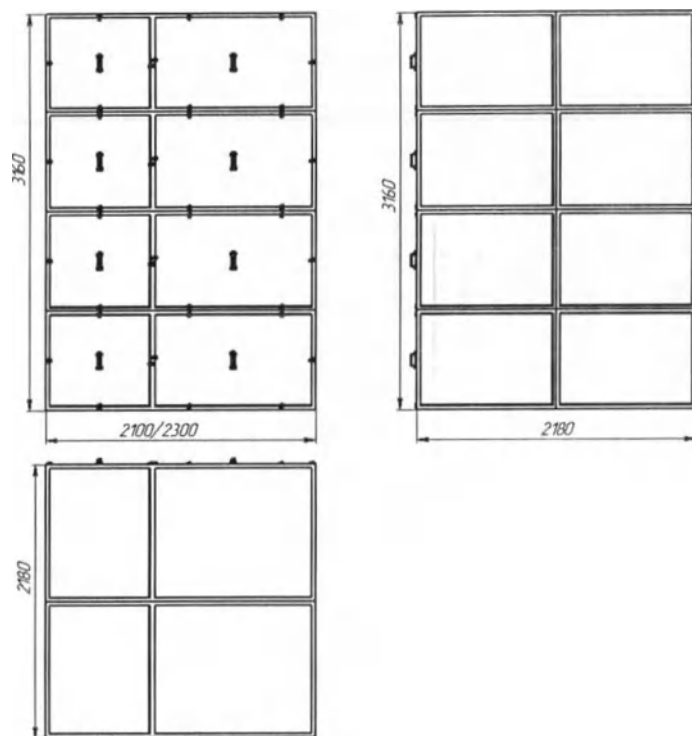


100. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 2700

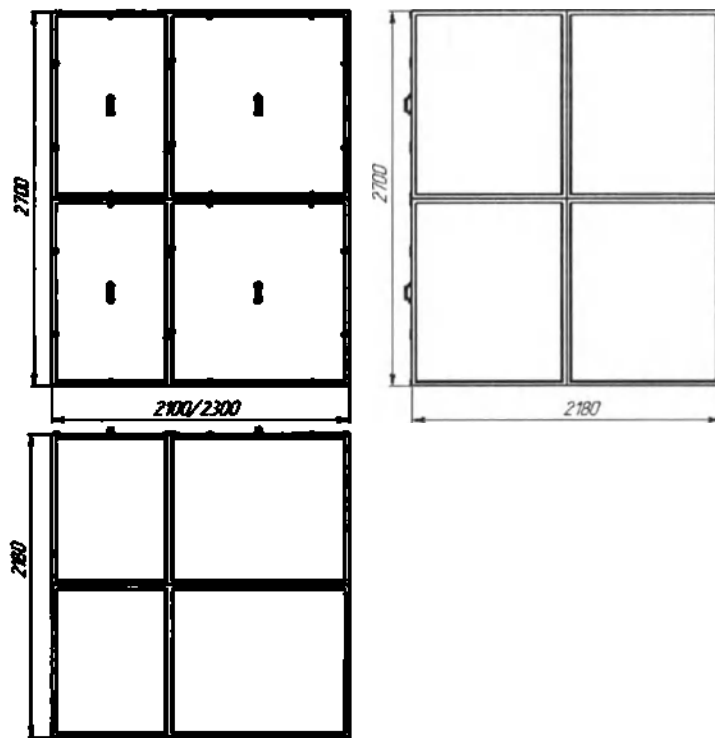


101. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 2700

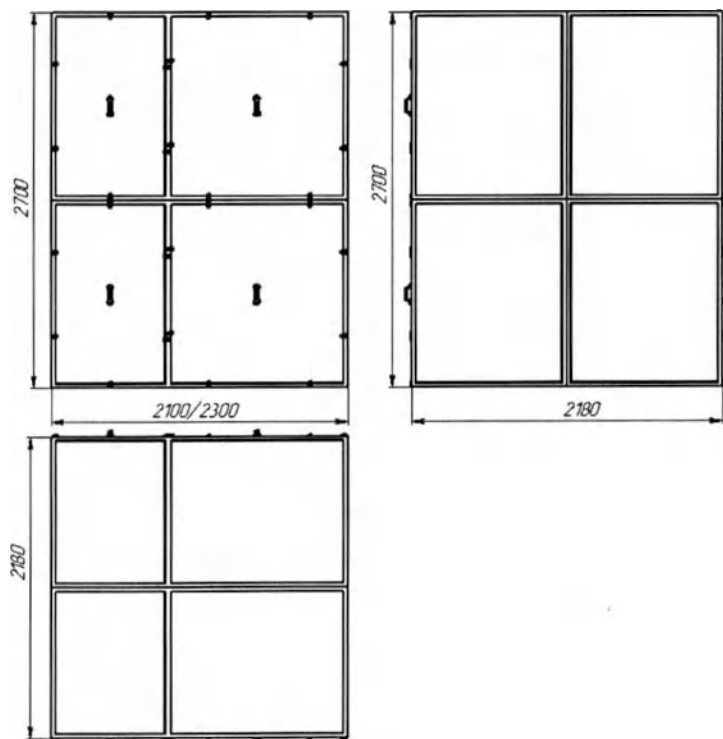


102. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2180 x 2700

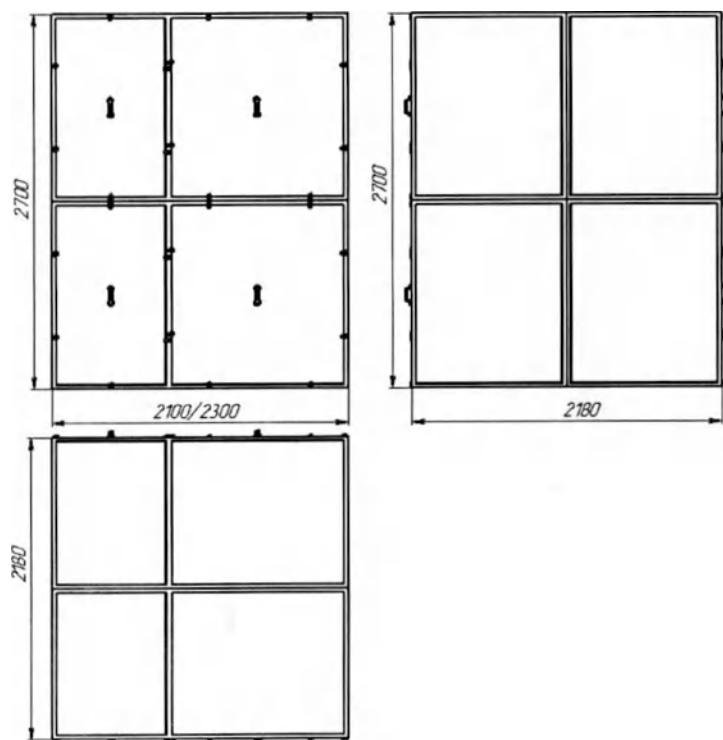


103. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2700 x 2180

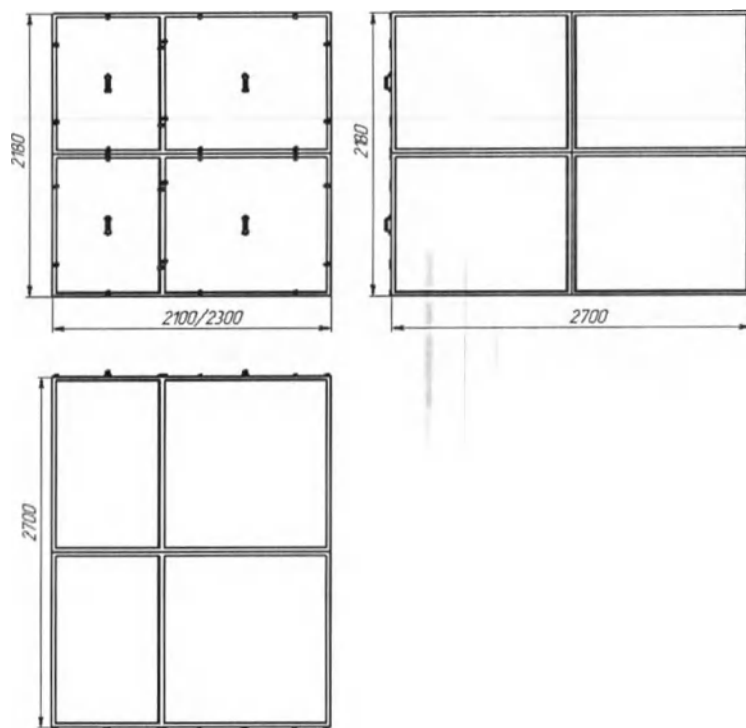


104. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2700 x 2180

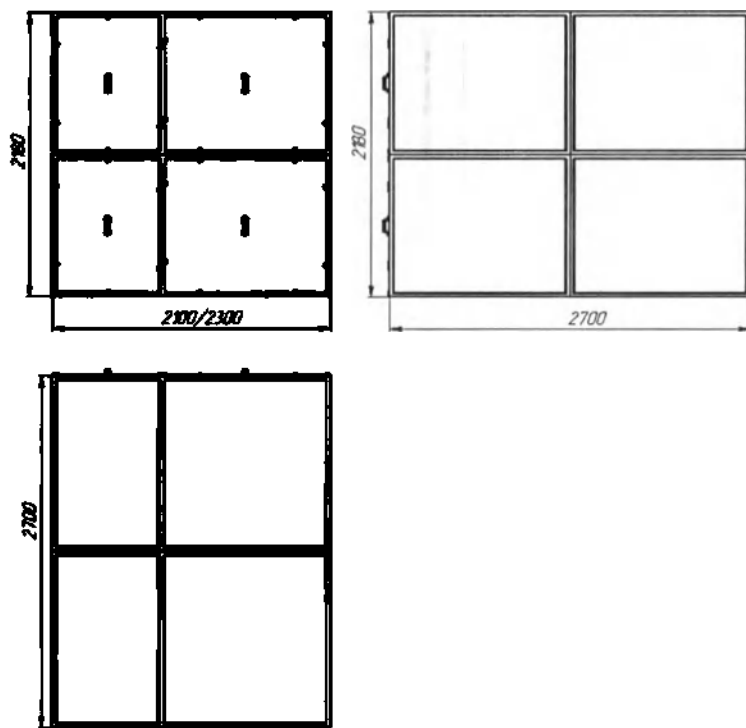


105. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х48000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2700 x 2180

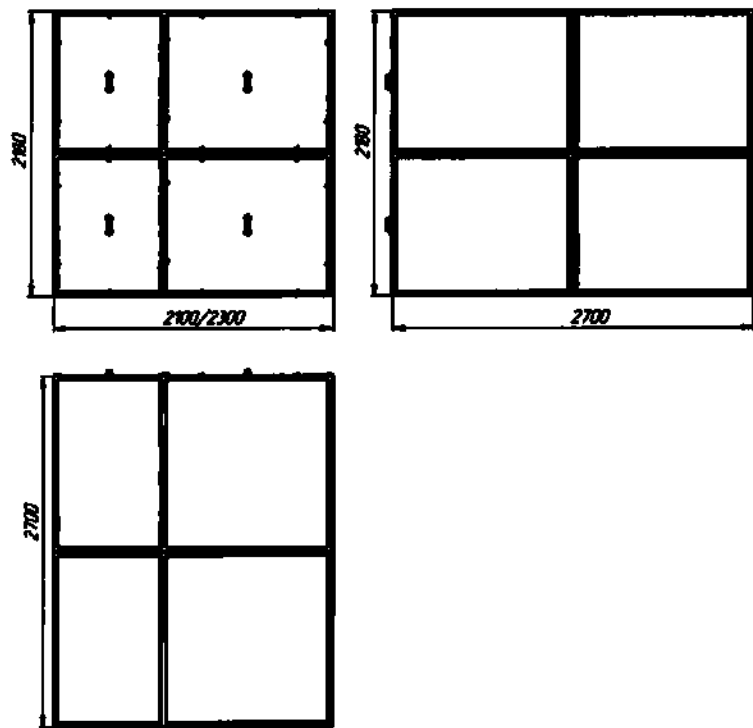


106. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2370 x 3270

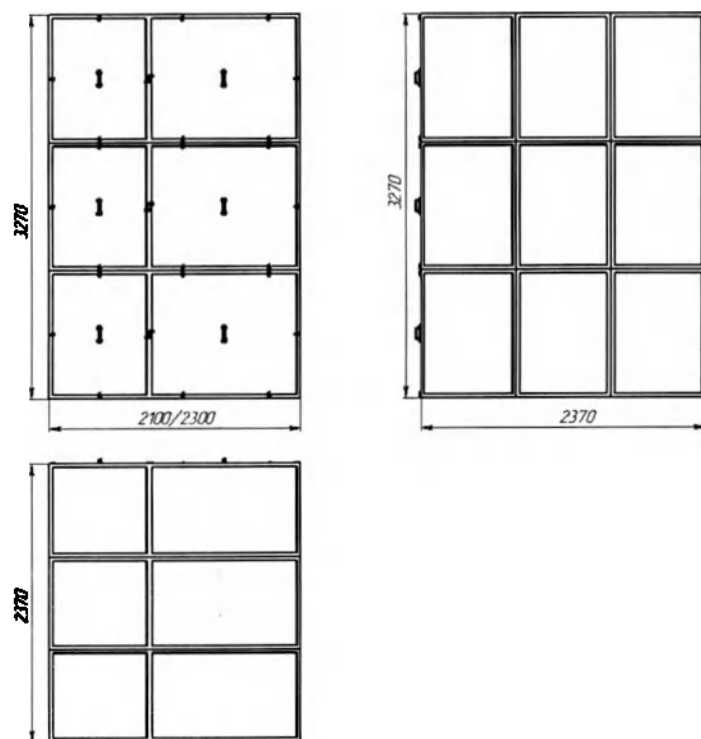


107. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2370 x 3270

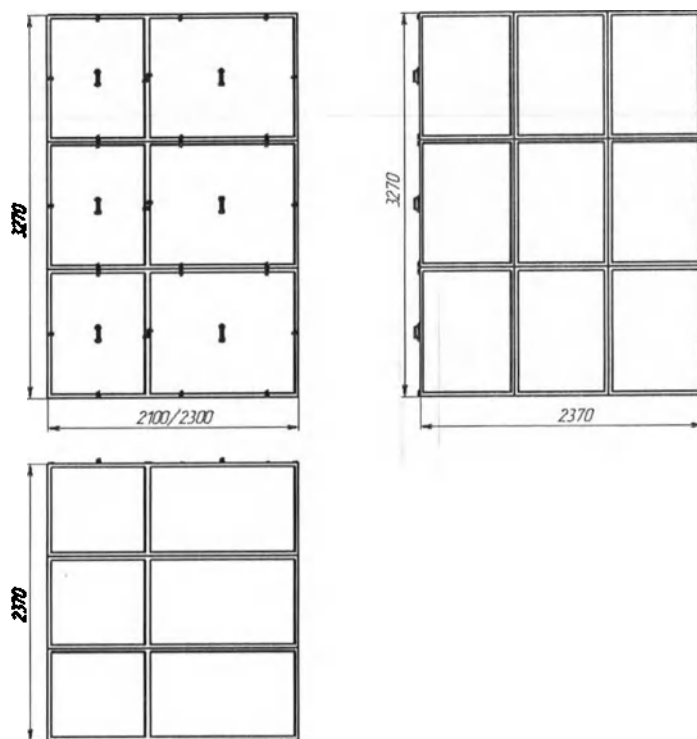


108. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф
КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 2370 x 3270

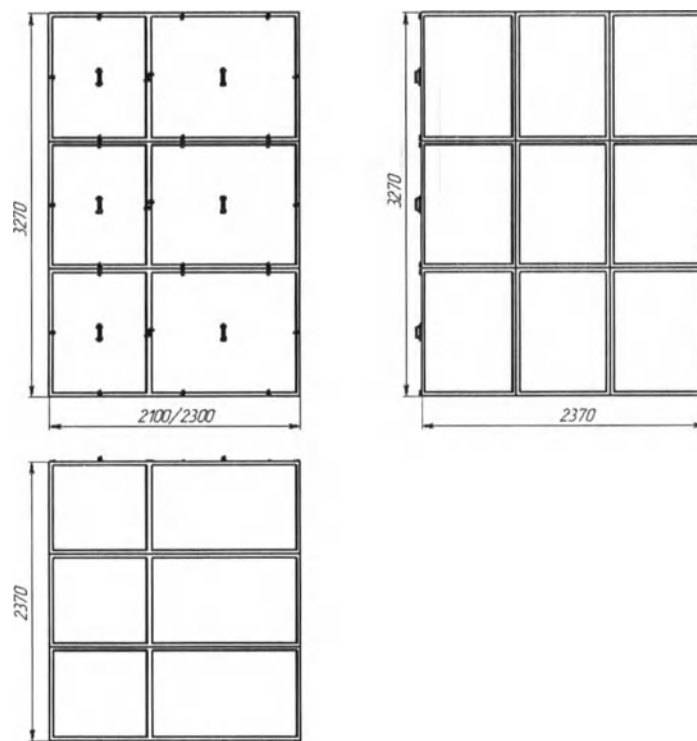


109. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2900 x 2370 x 3270

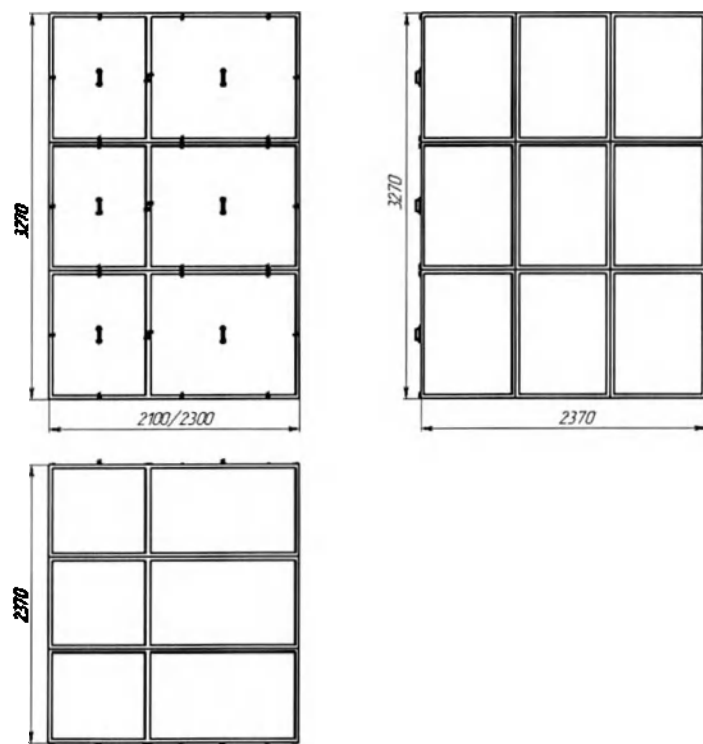


110. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 3270 x 2370

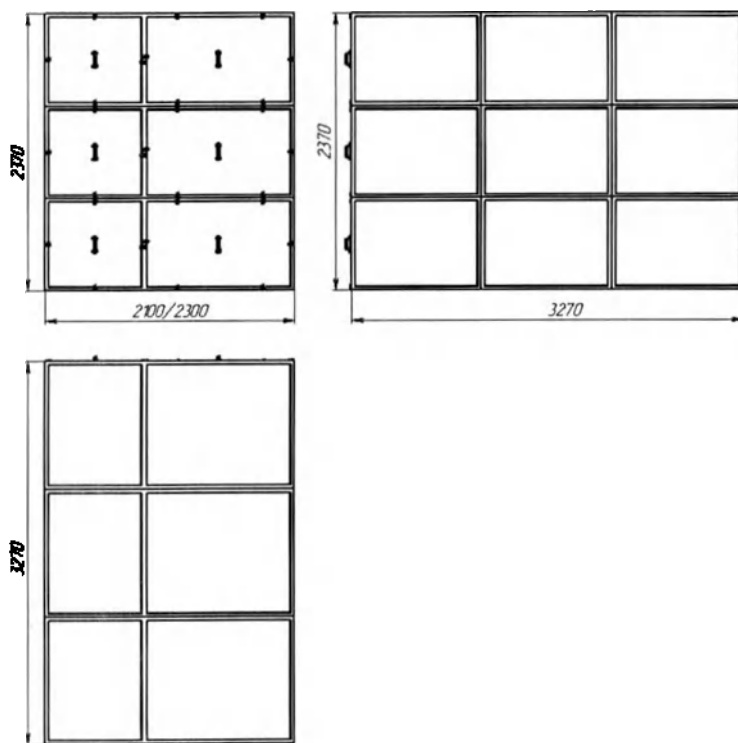


111. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 3270 x 2370

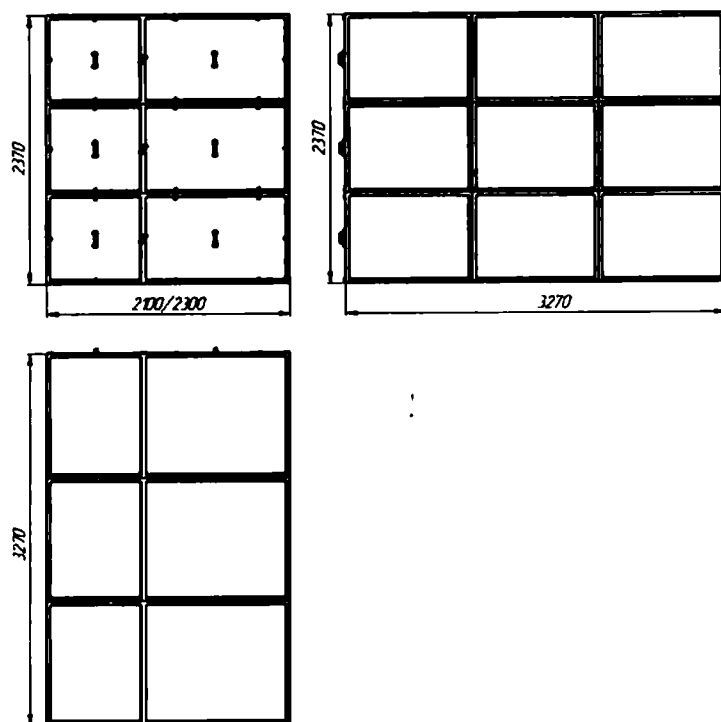


112. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2500 x 3270 x 2370

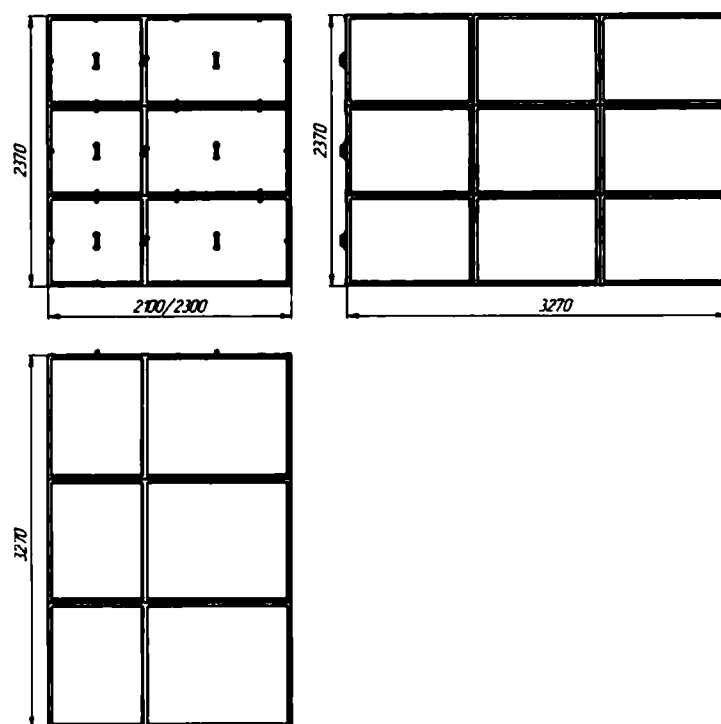


113. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х54000, размер (Д x Ш x В) 2900 x 3270 x 2370

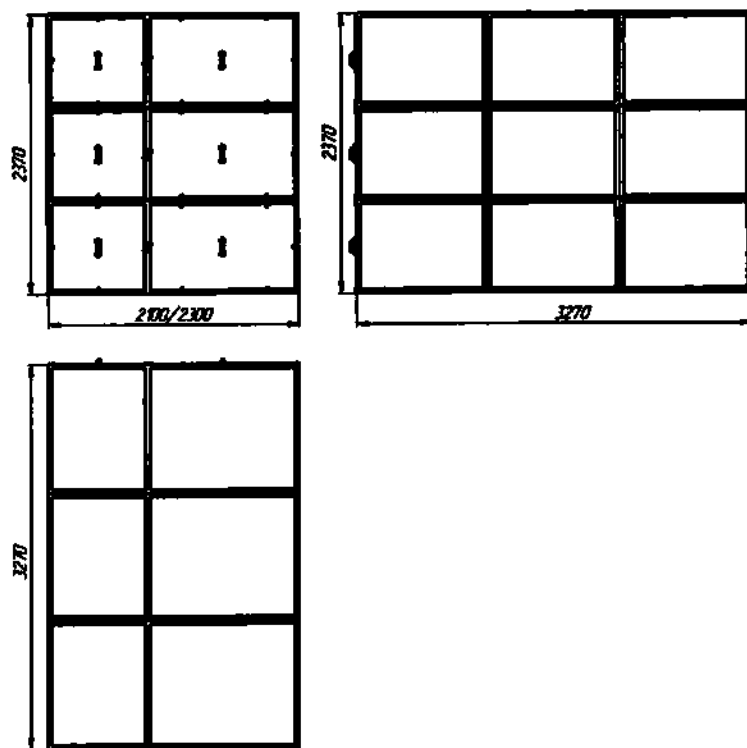


114. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х72000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 2180 x 4360

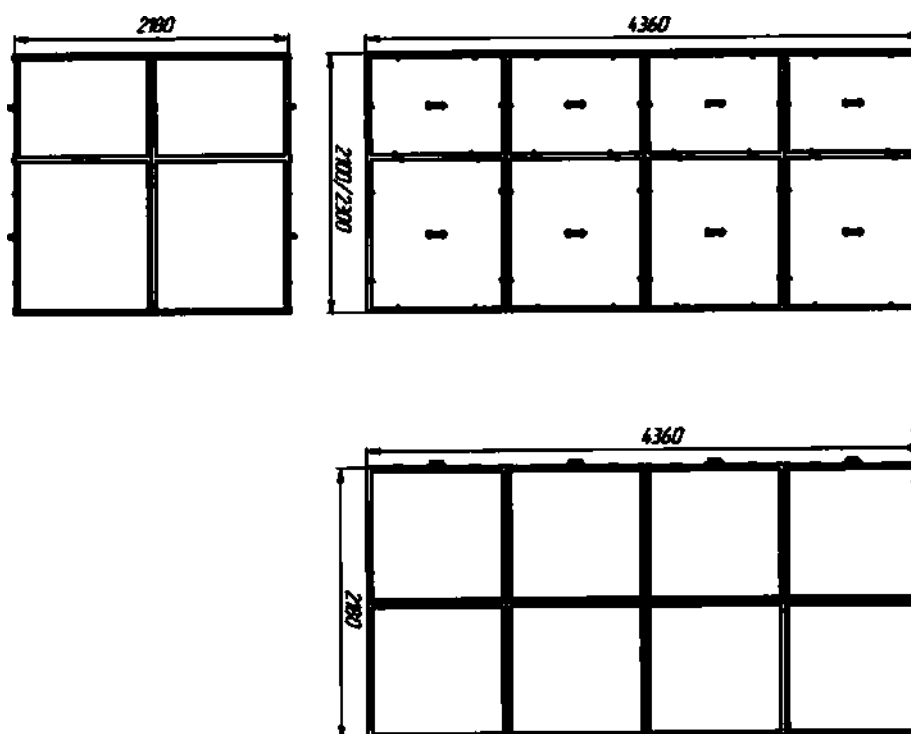


115. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х72000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 2180 x 4360

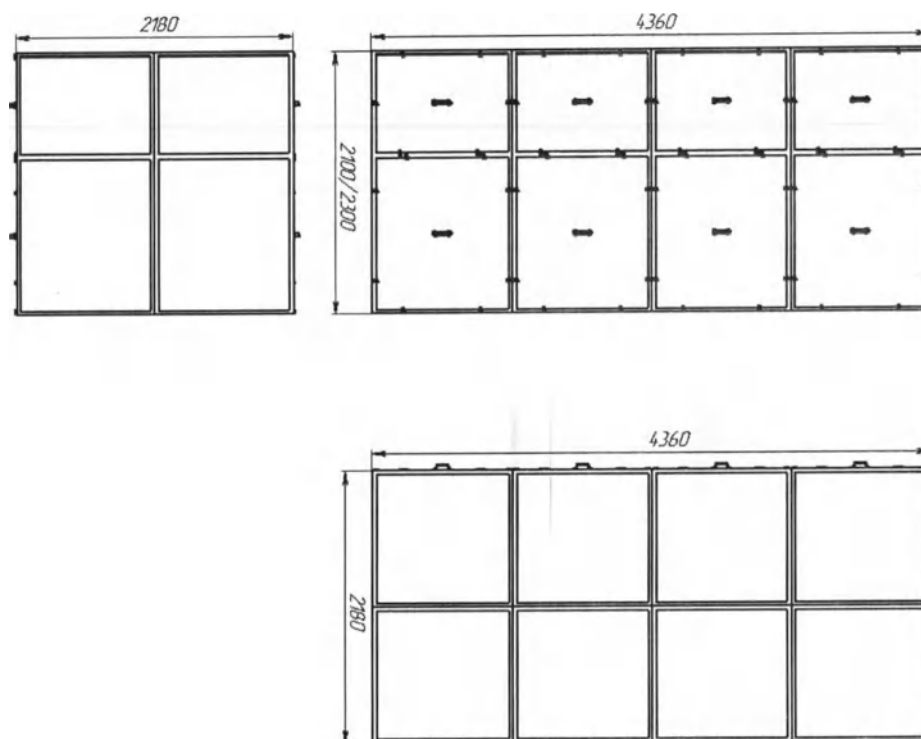


116. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х72000, размер (Д x Ш x В) 3100 x 2180 x 4360

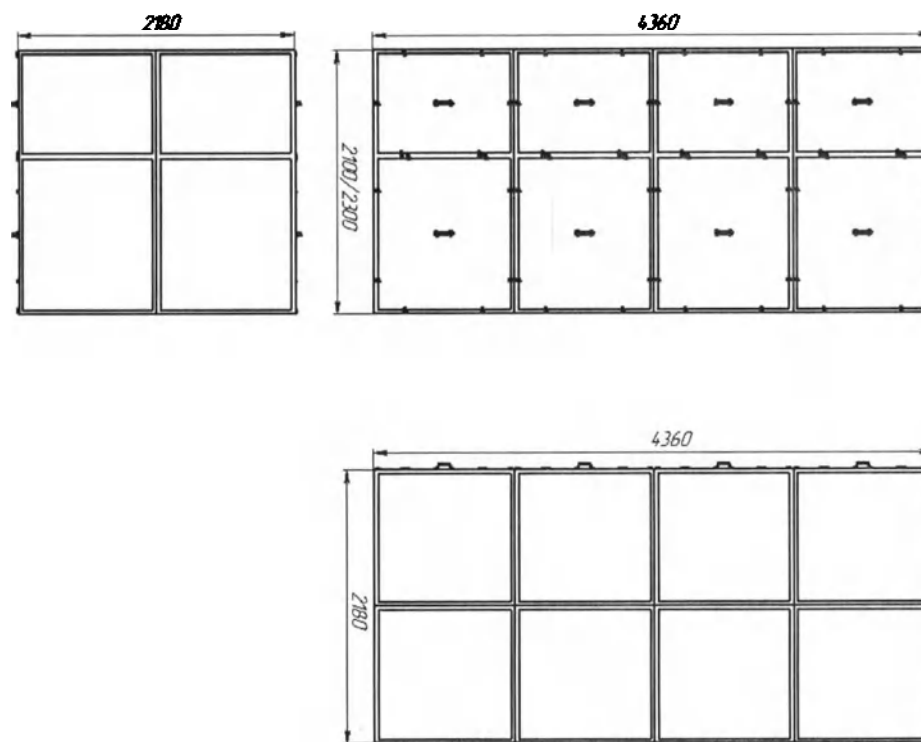


117. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х72000, размер (Д x Ш x В) 3500 x 2180 x 4360

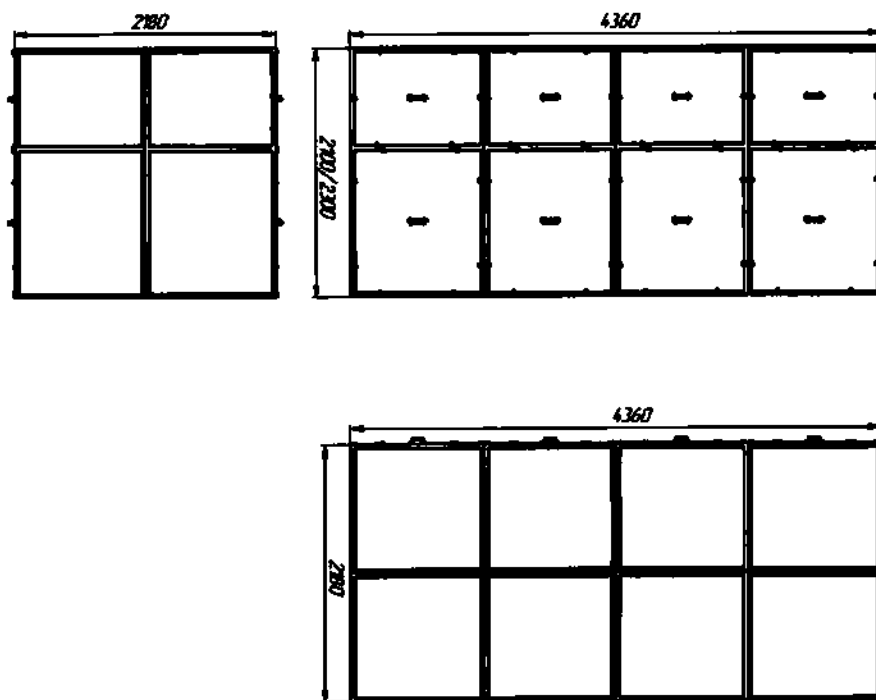


118. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х81000, размер (Д x Ш x В) 2100 x 3270 x 3270

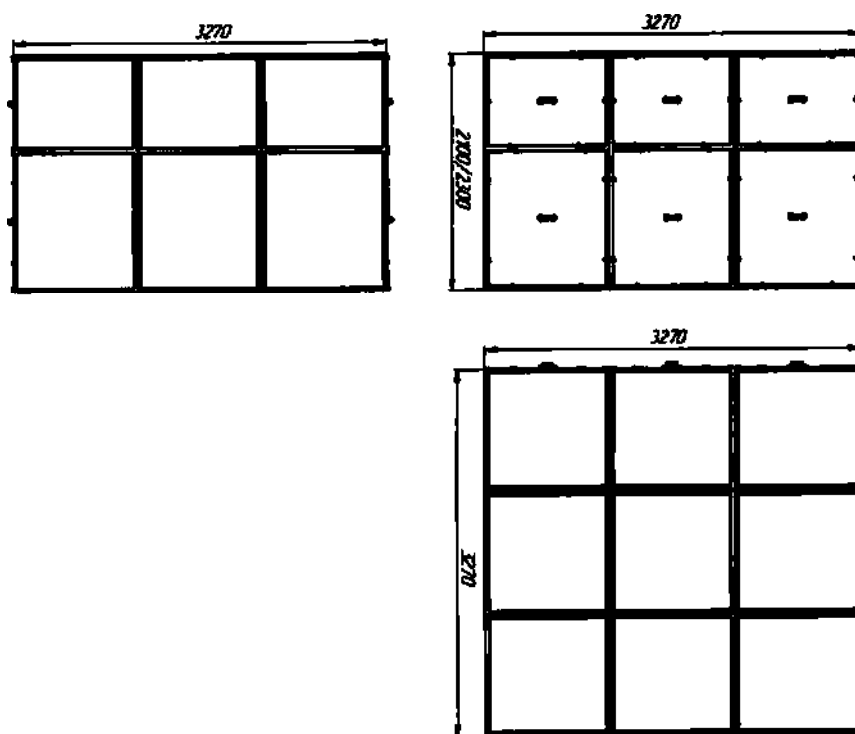


119. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х81000, размер (Д x Ш x В) 2300 x 3270 x 3270

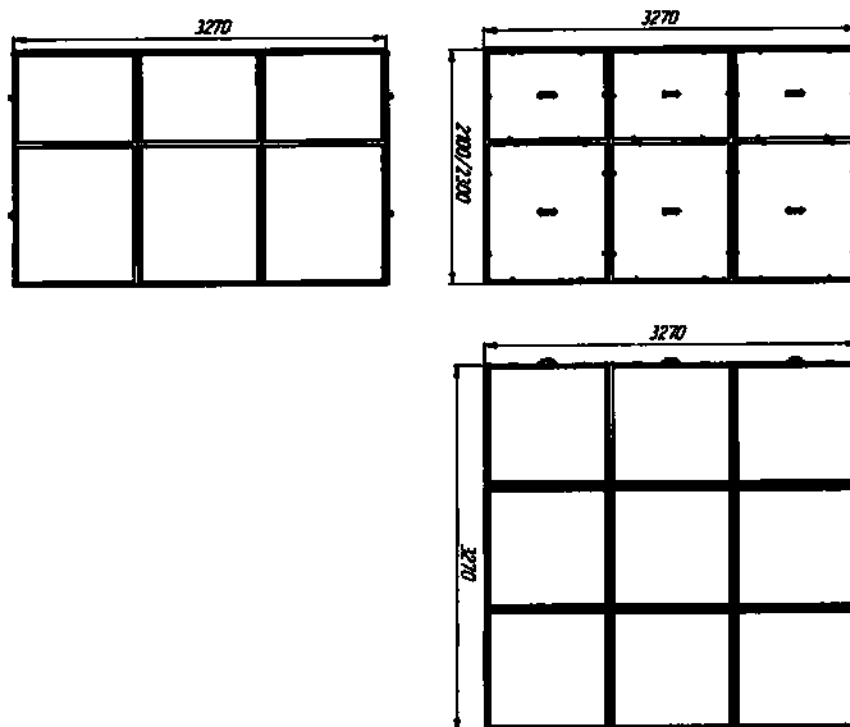

120. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х81000, размер (Д x Ш x В) 3100 x 3270 x 3270

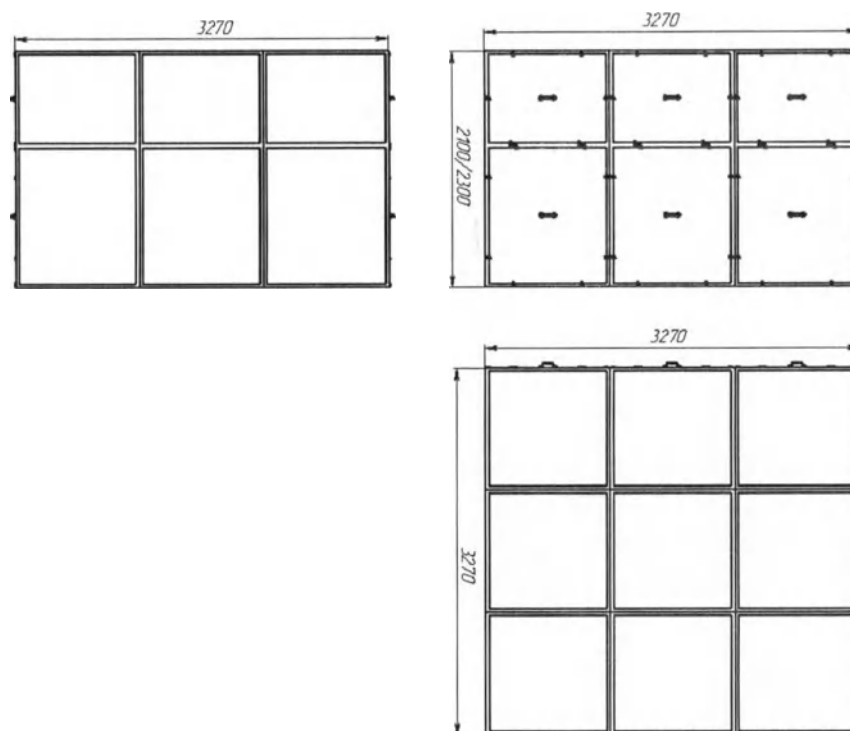

121. Обеззараживатель-очиститель фотокаталитический воздуха Аэролайф КФУ2-150х81000, размер (Д x Ш x В) 3500 x 3270 x 3270

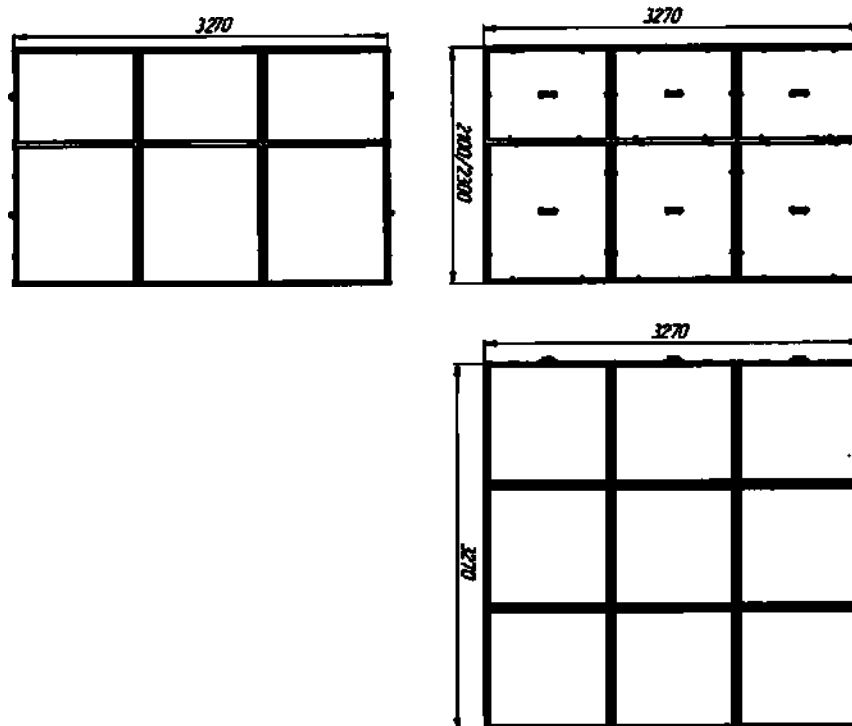

Информация об электромагнитной совместимости

«Обеззараживатели-очистители фотокаталитические воздуха Аэролайф КФУ2-150 по ТУ 32.50.50-002-44999832-2022» соответствует стандарту ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014

Указания и декларация изготовителя — электромагнитное излучение		
Обеззараживатели предназначены для использования в указанном ниже электромагнитном поле. Заказчик или пользователь Обеззараживателя в вариантах исполнения должен обеспечить их использование в таком окружении.		
Тест эмиссии	Соответствие	Электромагнитное окружение — указания
Радионизлучение СИСПР 11	Группа 1	В медицинском изделии используется РЧ-энергия только для внутренней функции. Следовательно, её РЧ-эмиссия очень низкая и, маловероятно, вызывает интерференцию в близко расположенном электронном оборудовании.
РЧ излучения	Класс А	Медицинское изделие пригодно для использования во всех учреждениях, включая бытовые и непосредственно подключённые к общей сети питания низкого напряжения, обеспечивающей питание зданий для бытовых целей.
Гармоническая эмиссия IEC 61000-3-2	Класс А	
Флуктуация напряжения / пульсирующая эмиссия IEC 61000-3-3	Класс В	
Колебание электросети МЭК 61000-3-3	Критерий А	Изделие подходит для применения в условиях профессиональных медицинских учреждений, а также может быть напрямую подключено к общественной сети электропитания низкого напряжения

Указания и декларация изготовителя — электромагнитная защищённость			
Обеззараживатели предназначены для использования в указанном ниже электромагнитном поле. Заказчик или пользователь медицинского изделия должен обеспечить её использование в таком окружении.			
Тест защищённость	Уровень теста IEC 60601	Уровень соответствия	Указания по электромагнитному окружению
Электростатический разряд (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 кВ контакт ± 8 кВ воздух	± 6 кВ контакт ± 8 кВ воздух	Полы должны быть деревянные, бетонные или покрытые керамической плиткой. Если полы покрыты синтетическим материалом, относительная влажность должны быть не менее 30 %.

Невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам МЭК 61000-4-4	± 2 кВ для линий электроснабжения	± 2 кВ для линий электроснабжения	Качество сетевого питания должно соответствовать типичному промышленному или больничному окружению.
Устойчивость к динамическим изменениям режима электропитания МЭК 61000-4-5	± 1 кВ линия(и) в линию(и) ± 2 кВ линия(и) в землю	± 1 кВ линия(и) в линию(и) ± 2 кВ линия(и) в землю	Качество сетевого питания должно соответствовать типичному промышленному или больничному окружению.
Устойчивость на кратковременные понижения напряжения, короткие отключения и испытания на защищённость от вариаций напряжения МЭК 61000-4-11	$< 5\%$ U_T^* (провал $U_T > 95\%$) в течение 1/2 периодов 40% U_T (провал $U_T 60\%$) в течение 5 периодов 70% U_T (провал $U_T 30\%$) в течение 25 периодов $< 5\%$ U_T (провал $U_T > 95\%$) в течение 5 сек.	$< 5\%$ U_T^* (провал $U_T > 95\%$) в течение 1/2 периодов 40% U_T (провал $U_T 60\%$) в течение 5 периодов 70% U_T (провал $U_T 30\%$) в течение 25 периодов $< 5\%$ U_T (провал $U_T > 95\%$) в течение 5 сек.	Качество сетевого питания должно соответствовать типичному промышленному или больничному окружению. Если пользователю медицинского изделия необходима непрерывная работа при прерывании сетевого питания, рекомендуется обеспечить питание медицинского изделия от источника бесперебойного питания.
Помехоустойчивость в условиях магнитного поля промышленной частоты МЭК 61000-4-8	3 А/м	3 А/м	Магнитные поля с частотой сети должны быть на уровне, характерном для типичного расположения в типичном промышленном или больничном окружении.
ПРИМЕЧАНИЕ: U_T — это напряжение сети переменного тока до применения тестового уровня.			

Указания и декларация изготовителя — электромагнитная защищённость			
Обеззараживатели предназначены для использования в указанном ниже электромагнитном поле. Заказчик или пользователь медицинского изделия должен обеспечить её использование в таком окружении.			
Тест защищённость	Уровень теста IEC 60601	Уровень соответствия	Указания по электромагнитному окружению
			Оборудование портативной и мобильной РЧ-связи следует использовать не ближе от любой части медицинского изделия,

Устойчивость к воздействию электромагнитного поля с излучением на радиочастотах МЭК 60601-4-3	3 В/м 80 МГц – 2,5 Гц	3 В/м	включая кабели, чем на рекомендованном разделительном расстоянии, рассчитанном по уравнению, применимому к частоте передатчика. Рекомендованное разделительное расстояние: $d = 1.2\sqrt{P}$
Устойчивость к кондуктивным помехам, создаваемым радиочастотными полями МЭК 60601-4-6	3 В ср. кв. 150 кГц – 80 МГц	3 В ср. кв.	$d = 1.2\sqrt{P}$ 80 МГц до 800 МГц $d = 2.3\sqrt{P}$ 800 МГц до 2,5 ГГц где P — максимальный номинал выходной мощности передатчика в ваттах (Вт) в соответствии с изготовителем передатчика и d — рекомендованное разделительное расстояние в метрах (м). Напряжённость поля от фиксированных РЧ-передатчиков, как определено в электромагнитном анализе рабочего места ^а , должна быть меньше, чем уровень соответствия в каждом диапазоне частот ^б . Интерференция может возникнуть вблизи оборудования, помеченного следующим символом: 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: При 80 МГц и 800 МГц применим более высокий диапазон частот.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Эти указания применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитного поля влияют поглощение и отражение от структур, предметов и людей.

а) Напряжённость поля от фиксированных передатчиков, таких как базовые станции для радио (сотовых/беспроводных) телефонов и наземных мобильных радио, любительских станций, АМ и FM радио вещания и ТВ вещания нельзя предсказать точно теоретически. Для получения доступа к электромагнитному полю, обусловленному фиксированными РЧ-передатчиками, следует рассмотреть анализ электромагнитного поля рабочего места. Если измеренная напряжённость поля в месте, в котором используется Обеззараживатель, превышает применимый вышеуказанный уровень РЧ-соответствия медицинского изделия, следует проверять в отношении нормальной эксплуатации. Если наблюдаются аномальные характеристики, могут оказаться

необходимыми дополнительные меры, такие как переориентация или перемещение медицинского изделия.

b) За пределами диапазона частот 150 кГц – 80 МГц, напряжённость поля должна быть менее 3 В/м.

Указания и декларация изготовителя — электромагнитная защищённость			
Изделия предназначены для применения в условиях медицинских профессиональных учреждений. Проверка защищённости от электромагнитных помех соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014.			
Тест защищённость	Уровень теста IEC 60601	Уровень соответствия	Указания по электромагнитному окружению
Электростатический разряд (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 кВ контакт ± 15 кВ воздух Класс C	± 2, 4, 8 кВ контакт ± 2, 4, 8, 15 кВ воздух	Относительная влажность должна составлять, как минимум, 5 %. Электростатический разряд может привести к временному выходу из строя, что потребует повторного запуска или перенастройки изделия пользователем.
Наносекундные импульсные помехи МЭК 61000-4-4	± 2 кВ для линий электропитания ± 1 кВ для входных / выходных линий Класс B	± 2 кВ для линий электропитания ± 1 кВ для входных / выходных линий	Качество сетевого питания должно соответствовать типичному промышленному или больничному окружению.
Выброс тока МЭК 61000-4-5	± 1 кВ при дифференциальном режиме ± 2 кВ при общем режиме Класс A	± 1 кВ при дифференциальном режиме ± 2 кВ при общем режиме	Качество сетевого питания должно соответствовать типичному промышленному или больничному окружению.
Провалы напряжения, короткие перерывы и колебания в линиях электропитания МЭК 61000-4-11	< 5 % UT для 0,5 цикла 40 % UT для 5 циклов 70 % UT для 25 циклов, Критерий B и C	< 5 % UT для 0,5 цикла 40 % UT для 5 циклов 70 % UT для 25 циклов	Качество тока сети должно соответствовать типичному электропитанию общественной сети низкого напряжения. ПДУ содержит батарею, которая подлежит зарядке с целью её использования без сети.
Магнитные поля	3 А/м	0,3 А/м	Магнитные поля с частотой сети должны быть на уровне, характерном для типичного

			расположения в типичном промышленном или больничном окружении.
Радиочастота при общем режиме МЭК 61000-4-6	3 В 150 кГц–80 МГц	3 В 150 кГц–80 МГц	
Излучаемые радиоволны МЭК 61000-4-3	3 В/м 80 МГц–2,5 ГГц	3 В/м 80 МГц–2,5 ГГц	
ПРИМЕЧАНИЕ: U_T — это напряжение сети переменного тока до применения тестового уровня.			

Рекомендованные разделительные расстояния между портативным и мобильным РЧ-оборудованием для связи и медицинским изделием			
Медицинское изделие предназначено для использования в электромагнитных полях, в которых излучаемые РЧ-аномалии контролируются. Заказчик или пользователь медицинского изделия может помочь предупредить электромагнитную интерференцию путём сохранения минимального расстояния между портативными и мобильными средствами РЧ-связи (передатчиками) и медицинским изделием, как рекомендовано ниже, в соответствии с максимальной выходной мощностью средств связи.			
Номинальная максимальная выходная мощность передатчика Вт	Разделительное расстояние в соответствии с частотой передатчика м		
	150 кГц до 80 МГц $d = 1.2\sqrt{P}$	80 МГц до 800 МГц $d = 1.2\sqrt{P}$	800 МГц до 2,5 ГГц $d = 2.3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23
Для передатчиков с номинальной максимальной выходной мощностью, не перечисленных выше, рекомендованное разделительное расстояние d в метрах (м) можно оценить с помощью уравнения, применимого к частоте передатчика, где P — номинальная максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) в соответствии с требованиями изготовителя передатчика.			
ПРИМЕЧАНИЕ 1: при 80 МГц и 800 МГц применимо разделительное расстояние для более высокого диапазона частот.			
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Эти указания применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитного поля влияют поглощение и отражение от структур, предметов и людей.			

Прошито, пронумеровано
(76) листов
Печать

