

서울 서초구 서초대로49길 5, 501호

(서초동 1716-7, 승보빌딩)

[별지 제41호서식]

공증인가
법무법인

도시

(전화) 02-2183-0686

(팩스) 02-2183-0690

Registered No. 2024 - 2130

NOTARIAL CERTIFICATE

DOSI LAW FIRM

#501, 5, Seocho-daero 49-gil,

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea



297mm

보존용지(1종) 70g/m²

Instruction for Use

To. Roszdravnadzor

We, Osstem Implant Co., Ltd. hereby declare that Instruction for Use provided to the Roszdravnadzor is complete, consistent and authentic.

Osstem Implant Co., Ltd.

Position : President

Name : Kim Hae Sung

asgw



OSSTEM IMPLANT CO.,Ltd.,
A-dong, 51, Mayu-ro, 238beon-gil, Siheung-si,
Gyeonggi-do, 15079, Republic of Korea
President Haesung, KIM

Инструкция по применению
Материал керамический Estar-Z для изготовления зубных
протезов

Инструкция по применению
Материал керамический Estar-Z для изготовления зубных протезов

1. Информация об изделии

Изделие представляет собой стоматологические керамические заготовки на основе диоксида циркония, предназначенные для изготовления зубных протезов, таких как вкладки, накладки, виниры, коронки и мосты, с использованием фрезерных систем CAD/CAM.

2. Назначение

Используется для изготовления цельнокерамических протезов.

3. Меры предосторожности перед использованием

- A. Перед использованием проверьте название модели.
- B. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению.
- C. Убедитесь в отсутствии на изделии повреждений, включая поломки и трещины.
- D. При проектировании зубного протеза рекомендуется проектировать литник толщиной 2 мм и более и длиной 3 мм и более.

4. Инструкции по использованию

➤ **Диск**

- A. Закрепите диск на фрезерном устройстве с помощью зажимного приспособления.
- B. Введите данные о диске, такие как материал, ширина, толщина и форма, во фрезерное устройство.
- C. Введите калибровочные данные, необходимые для обработки, во фрезерное устройство.
- D. Обработайте протез фрезерным устройством.
- E. После обработки снимите диск с приспособления и фрезерного устройства
- F. Извлеките обработанный зубной протез из изделия.
- G. С помощью печи для спекания спекайте зубную реставрацию в соответствии со следующей таблицей

➤ **Блок**

- A. Закрепите изделие на фрезерном устройстве в соответствии с указанным направлением.
- B. Введите данные о продукте, такие как толщина продукта и степень расширения (степень усадки), во фрезерное устройство.
- C. Продукт фрезеруется и обрабатывается во фрезерном устройстве.
- D. После фрезерования отделите продукт от фрезерного устройства.
- E. Отделите обработанный зубной протез от продукта.
- F. Высушите отделенный зубной протез при температуре не менее 100°C в течение 30 минут.
- G. С помощью печи для спекания спекайте зубную реставрацию в соответствии со следующей таблицей.

Условия спекания

Температурные условия		Условия выдержки
Комнатная температура	≈5°C/мин	120 минут
▶ Целевая температура		
Целевая температура	≈10°C/мин	-
▶ Комн. темп.		
Целевая температура	1450–1600°C	

5. **Хранение и обслуживание после использования**
 - **Диск**
 - A. Обработанный протез предназначен только для одноразового использования и его нельзя использовать повторно.
 - B. Полностью высушите и сохраните неиспользуемую часть изделия.
 - C. Во избежание повреждения храните изделие в оригинальной упаковке.
 - **Блок**
 - A. Обработанный протез предназначен только для одноразового использования и его нельзя использовать повторно.
6. **Меры предосторожности при использовании**
 - A. **Предупреждение**
 - i. Изделие предназначено только для профессиональных стоматологов и не должно использоваться непрофессионалами.
 - ii. Не используйте это изделие для каких-либо других целей, кроме предполагаемого использования.
 - B. **Общие предостережения**
 - i. При использовании следуйте инструкциям по применению и мерам предосторожности.
 - ii. Перед использованием проверьте изделие на наличие повреждений или загрязнений.
 - iii. Не прилагайте к изделию чрезмерных усилий или ударов.
 - iv. Обязательно надевайте средства защиты при отделении зубной реставрации после процесса фрезерования. Будьте осторожны, чтобы не повредить реставрацию, уронив ее.
 - v. При использовании таких изделий, как жидкость для окрашивания для изготовленной зубной реставрации следуйте инструкциям производителя и тщательно высушите реставрацию перед использованием.
 - vi. Обязательно дайте спеченной реставрации достаточно остыть, чтобы избежать риска ожогов.
 - vii. Проверьте окклюзию перед установкой зубной реставрации на пациента.
 - viii. При использовании адгезива для крепления зубной реставрации соблюдайте рекомендации производителя адгезива.
 - ix. Следует соблюдать осторожность при выбрасывании изделия, так как оставшаяся после изготовления часть может привести к повреждению тела.
7. **Побочные эффекты**
Не поступало никаких сообщений о побочных эффектах
8. **Противопоказания**
Более 2 соединенных промежуточных звеньев
Глубокий поддесневой абатмент
Сильная регрессия остаточных зубов
У пациентов есть аллергия на какой-либо из компонентов
Бруксизм
Другие варианты применения (не упомянутые)
9. **Показания к применению**
Показан для использования при изготовлении следующих керамических протезов.
 - Коронки на передние и боковые зубы
 - Мосты на передние и боковые зубы
 - Мосты максимум с двумя промежуточными звеньями
 - Вкладки
 - Накладки
 - Виниры
10. **Срок годности**
Не применимо.

Предлагаемая продукция поставляется на рынок в нестерильном состоянии. Таким образом, исследование стабильности в течение срока годности, такое как проверка упаковки, не требуется.

11. Информация о потенциальных потребителях

Предназначено для использования в медицинских учреждениях квалифицированными врачами и медицинскими специалистами.

12. Условия хранения, транспортирования и применения

	Условия применения	Условия транспортирования	Условия хранения
Температура	1~30 °C	-29~60 °C	1~30 °C
Влажность	30~60%	30~60%	30~60%

13. Требования к охране окружающей среды, сведения по утилизации или уничтожению

Класс опасности отходов – класс А по СанПиН 3684-21

14. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения медицинского изделия не ограничен.

Производитель гарантирует, что изделие соответствует заявленным свойствам и характеристикам, подтвержденным регистрационным удостоверением. При выявлении в изделиях дефектов, возникших по вине производителя, компания ООО «ОССТЕМ» принимает на себя обязательства по замене изделия на новое в течение 1 года с момента покупки товара, при условии предоставления покупателем дефектного изделия и соответствующих документов. Данная гарантия распространяется только на изделия, приобретенные у официального представителя производителя – ООО «ОССТЕМ» (Россия). Медицинские изделия с естественным износом обмену и возврату не подлежат. ООО «ОССТЕМ» не несет ответственности в случае повреждения или отказа в работе изделия, а также нанесенного им ущерба в случае, если это явилось следствием нарушения пользователем правил применения изделия, самостоятельной модификации, а также использования изделия не по прямому назначению.

15. Адрес для обращения потребителей на территории РФ / Уполномоченный представитель в России

ООО «ОССТЕМ», 115432, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 18, к. 7, помещ. 1Е/13

Тел : +7-495-739-99-25

e-mail : info@osstem.ru

Производитель

Osstem Implant Co., Ltd.

A-dong, 51, Mayu-ro 238beon-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do, 15079, Republic of Korea

Расшифровка символов

Символ	Расшифровка
	Номер по каталогу
	Код партии
	Дата изготовления
	Изготовитель
	Знак соответствия ГОСТ*


	Не использовать повторно
---	---------------------------------

***символ может быть добавлен при необходимости**

Приложение


Основные технические характеристики/ свойства изделия

Описание изделия

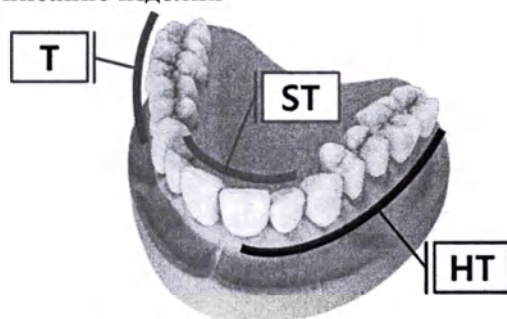

1) Estar-Z T

Estar-Z T — это стоматологические керамические заготовки на основе диоксида циркония, предназначенные для изготовления зубных протезов, таких как вкладки, накладки, виниры, коронки и мосты, с использованием фрезерных систем CAD/CAM, соответствующих типу II, классу 5 по ISO 6872. Они бывают только одного типа (диск) и обычно используются для задних зубов.

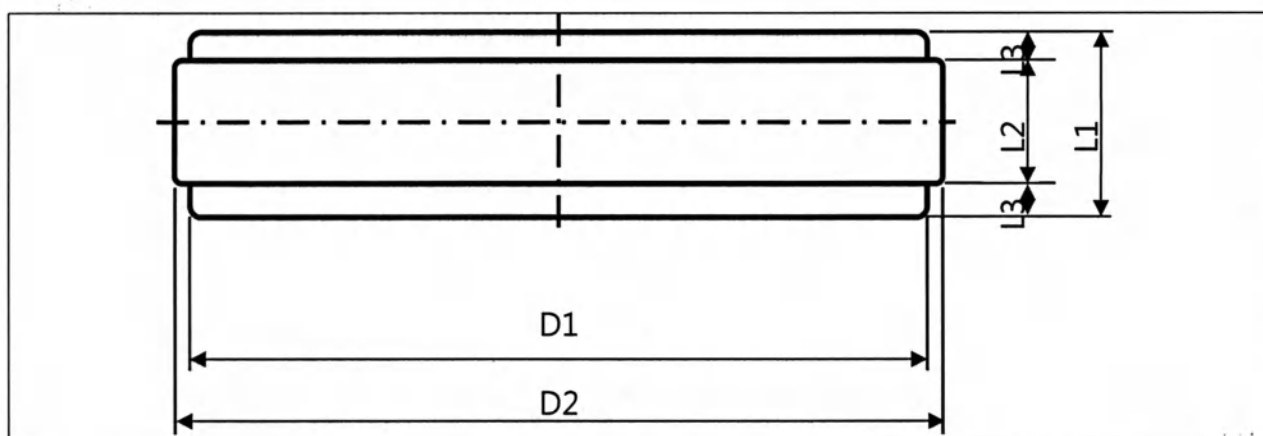

Единица измерения: мм

No.	Код	Оттенок	D1	D2	L1	L2	L3	Масса, г	Краткое описание
1	ZTA0010T	A0	-	98	10	-	-	260	Ф98 10T A0
2	ZTA0012T		94.2	98	12	10	1	320	Ф98 12T A.
3	ZTA0014T		94.2	98	14	10	2	365	Ф98 14T A.
4	ZTA0016T		94.2	98	16	10	3	415	Ф98 16T A.
5	ZTA0018T		94.2	98	18	10	4	470	Ф98 18T A0
6	ZTA0020T		94.2	98	20	10	5	520	Ф98 20T A0
7	ZTA0022T		94.2	98	22	10	6	570	Ф98 22T A.
8	ZTA0025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Ф98 25T A.
9	ZTA0030T		94.2	98	30	10	10	770	Ф98 30T A.
10	ZTA1010T	A1	-	98	10	-	-	260	Ф98 10T A1
11	ZTA1012T		94.2	98	12	10	1	320	Ф98 12T A1
12	ZTA1014T		94.2	98	14	10	2	365	Ф98 14T A.
13	ZTA1016T		94.2	98	16	10	3	415	Ф98 16T A1
14	ZTA1018T		94.2	98	18	10	4	470	Ф98 18T A1
15	ZTA1020T		94.2	98	20	10	5	520	Ф98 20T A1
16	ZTA1022T		94.2	98	22	10	6	570	Ф98 22T A1
17	ZTA1025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Ф98 25T A1
18	ZTA1030T		94.2	98	30	10	10	770	Ф98 30T A1

19	ZTA2010T	A2	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T A2
20	ZTA2012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T A
21	ZTA2014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T A
22	ZTA2016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T A
23	ZTA2018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T A
24	ZTA2020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T A
25	ZTA2022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T A
26	ZTA2025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T A
27	ZTA2030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T A2
28	ZTA3010T	A3	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T A3
29	ZTA3012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T A3
30	ZTA3014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T A3
31	ZTA3016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T A3
32	ZTA3018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T A3
33	ZTA3020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T A3
34	ZTA3022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T A3
35	ZTA3025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T A3
36	ZTA3030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T A3
37	ZTA3510T	A3.5	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T A3.5
38	ZTA3512T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T A3.5
39	ZTA3514T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T A3.5
40	ZTA3516T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T A3.5
41	ZTA3518T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T A3.5
42	ZTA3520T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T A3.5
43	ZTA3522T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T A3.5
44	ZTA3525T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T A3.5
45	ZTA3530T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T A3.5
46	ZTA4010T	A4	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T A4
47	ZTA4012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T A4
48	ZTA4014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T A4
49	ZTA4016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T A4
50	ZTA4018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T A4
51	ZTA4020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T A4
52	ZTA4022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T A4
53	ZTA4025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T A4
54	ZTA4030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T A4
55	ZTB1010T	B1	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T B1
56	ZTB1012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T B1
57	ZTB1014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T B1
58	ZTB1016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T B1
59	ZTB1018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T B1
60	ZTB1020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T B1
61	ZTB1022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T B1
62	ZTB1025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T B1
63	ZTB1030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T B1
64	ZTB2010T	B2	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T B2
65	ZTB2012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T B2
66	ZTB2014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T B2
67	ZTB2016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T B2
68	ZTB2018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T B2


69	ZTB2020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T B2
70	ZTB2022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T B2
71	ZTB2025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T B2
72	ZTB2030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T B2
73	ZTB3010T	B3	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T B3
74	ZTB3012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T B3
75	ZTB3014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T B3
76	ZTB3016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T B3
77	ZTB3018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T B3
78	ZTB3020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T B3
79	ZTB3022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T B3
80	ZTB3025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T B3
81	ZTB3030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T B3
82	ZTB4010T	B4	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T B4
83	ZTB4012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T B4
84	ZTB4014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T B4
85	ZTB4016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T B4
86	ZTB4018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T B4
87	ZTB4020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T B4
88	ZTB4022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T B4
89	ZTB4025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T B4
90	ZTB4030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T B4
91	ZTC1010T	C1	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T C1
92	ZTC1012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T C1
93	ZTC1014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T C1
94	ZTC1016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T C1
95	ZTC1018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T C1
96	ZTC1020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T C1
97	ZTC1022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T C1
98	ZTC1025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T C1
99	ZTC1030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T C1
100	ZTC2010T	C2	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T C2
101	ZTC2012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T C2
102	ZTC2014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T C2
103	ZTC2016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T C2
104	ZTC2018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T C2
105	ZTC2020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T C2
106	ZTC2022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T C2
107	ZTC2025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T C2
108	ZTC2030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T C2
109	ZTD2010T	D2	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T D2
110	ZTD2012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T D2
111	ZTD2014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T D2
112	ZTD2016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T D2
113	ZTD2018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T D2
114	ZTD2020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T D2
115	ZTD2022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T D2
116	ZTD2025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T D2
117	ZTD2030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T D2
118	ZTD3010T	D3	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T D3

119	ZTD3012T		94.2	98	12	10	1	320	Ф98 12Т D3
120	ZTD3014T		94.2	98	14	10	2	365	Ф98 14Т D3
121	ZTD3016T		94.2	98	16	10	3	415	Ф98 16Т D3
122	ZTD3018T		94.2	98	18	10	4	470	Ф98 18Т D3
123	ZTD3020T		94.2	98	20	10	5	520	Ф98 20Т D3
124	ZTD3022T		94.2	98	22	10	6	570	Ф98 22Т D3
125	ZTD3025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Ф98 25Т D3
126	ZTD3030T		94.2	98	30	10	10	770	Ф98 30Т D3
127	ZTD4010T	D4	-	98	10	-	-	260	Ф98 10Т D4
128	ZTD4012T		94.2	98	12	10	1	320	Ф98 12Т D4
129	ZTD4014T		94.2	98	14	10	2	365	Ф98 14Т D4
130	ZTD4016T		94.2	98	16	10	3	415	Ф98 16Т D4
131	ZTD4018T		94.2	98	18	10	4	470	Ф98 18Т D4
132	ZTD4020T		94.2	98	20	10	5	520	Ф98 20Т D4
133	ZTD4022T		94.2	98	22	10	6	570	Ф98 22Т D4
134	ZTD4025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Ф98 25Т D4
135	ZTD4030T		94.2	98	30	10	10	770	Ф98 30Т D4

2) Estar-Z HT

Estar-Z HT — это стоматологические керамические заготовки на основе диоксида циркония, предназначенные для изготовления зубных протезов, таких как вкладки, накладки, виниры, коронки и мосты, с использованием фрезерных систем CAD/CAM, соответствующих типу II, классу 5 по ISO 6872. Они бывают двух типов (диск и блок) и обычно используются для передних или задних зубов.

Диск

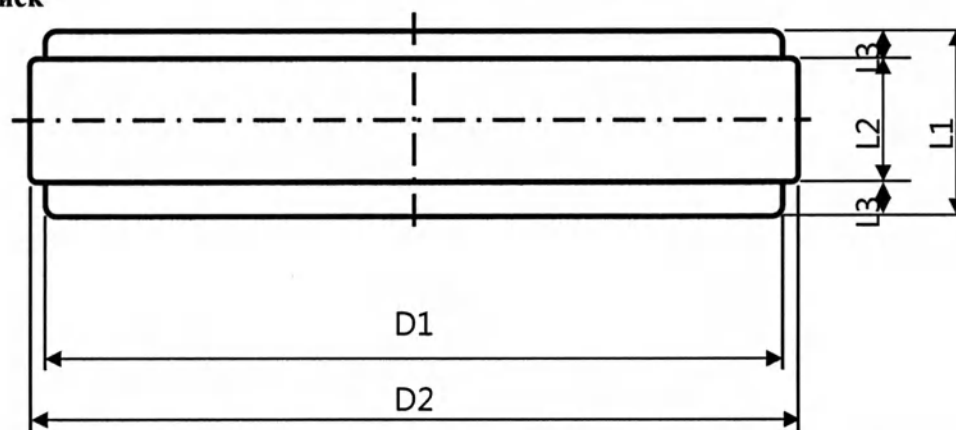

Единица измерения: мм


No.	Код	Оттенок	D1	D2	L1	L2	L3	Масса, г	Краткое описание
1	ZHTA0010T	A0	-	98	10	-	-	260	Ф98 10Т A0
2	ZHTA0012T		94.2	98	12	10	1	320	Ф98 12Т A0
3	ZHTA0014T		94.2	98	14	10	2	365	Ф98 14Т A0
4	ZHTA0016T		94.2	98	16	10	3	415	Ф98 16Т A0
5	ZHTA0018T		94.2	98	18	10	4	470	Ф98 18Т A0
6	ZHTA0020T		94.2	98	20	10	5	520	Ф98 20Т A0
7	ZHTA0022T		94.2	98	22	10	6	570	Ф98 22Т A0
8	ZHTA0025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Ф98 25Т A0
9	ZHTA0030T		94.2	98	30	10	10	770	Ф98 30Т A0
10	ZHTA1010T	A1	-	98	10	-	-	260	Ф98 10Т A1
11	ZHTA1012T		94.2	98	12	10	1	320	Ф98 12Т A1
12	ZHTA1014T		94.2	98	14	10	2	365	Ф98 14Т A1

13	ZHTA1016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T A1
14	ZHTA1018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T A1
15	ZHTA1020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T A1
16	ZHTA1022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T A1
17	ZHTA1025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T A1
18	ZHTA1030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T A1
19	ZHTA2010T	A2	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T A2
20	ZHTA2012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T A2
21	ZHTA2014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T A2
22	ZHTA2016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T A2
23	ZHTA2018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T A2
24	ZHTA2020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T A2
25	ZHTA2022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T A2
26	ZHTA2025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T A2
27	ZHTA2030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T A2
28	ZHTA3010T	A3	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T A3
29	ZHTA3012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T A3
30	ZHTA3014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T A3
31	ZHTA3016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T A3
32	ZHTA3018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T A3
33	ZHTA3020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T A3
34	ZHTA3022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T A3
35	ZHTA3025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T A3
36	ZHTA3030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T A3
37	ZHTA3510T	A3.5	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T A3.5
38	ZHTA3512T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T A3.5
39	ZHTA3514T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T A3.5
40	ZHTA3516T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T A3.5
41	ZHTA3518T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T A3.5
42	ZHTA3520T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T A3.5
43	ZHTA3522T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T A3.5
44	ZHTA3525T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T A3.5
45	ZHTA3530T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T A3.5
46	ZHTA4010T	A4	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T A4
47	ZHTA4012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T A4
48	ZHTA4014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T A4
49	ZHTA4016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T A4
50	ZHTA4018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T A4
51	ZHTA4020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T A4
52	ZHTA4022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T A4
53	ZHTA4025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T A4
54	ZHTA4030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T A4
55	ZHTB1010T	B1	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T B1
56	ZHTB1012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T B1
57	ZHTB1014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T B1
58	ZHTB1016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T B1
59	ZHTB1018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T B1
60	ZHTB1020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T B1
61	ZHTB1022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T B1
62	ZHTB1025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T B1

63	ZHTB1030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T B1
64	ZHTB2010T	B2	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T B2
65	ZHTB2012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T B2
66	ZHTB2014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T B2
67	ZHTB2016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T B2
68	ZHTB2018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T B2
69	ZHTB2020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T B2
70	ZHTB2022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T B2
71	ZHTB2025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T B2
72	ZHTB2030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T B2
73	ZHTB3010T	B3	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T B3
74	ZHTB3012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T B3
75	ZHTB3014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T B3
76	ZHTB3016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T B3
77	ZHTB3018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T B3
78	ZHTB3020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T B3
79	ZHTB3022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T B3
80	ZHTB3025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T B3
81	ZHTB3030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T B3
82	ZHTB4010T	B4	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T B4
83	ZHTB4012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T B4
84	ZHTB4014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T B4
85	ZHTB4016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T B4
86	ZHTB4018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T B4
87	ZHTB4020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T B4
88	ZHTB4022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T B4
89	ZHTB4025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T B4
90	ZHTB4030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T B4
91	ZHTC1010T	C1	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T C1
92	ZHTC1012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T C1
93	ZHTC1014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T C1
94	ZHTC1016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T C1
95	ZHTC1018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T C1
96	ZHTC1020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T C1
97	ZHTC1022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T C1
98	ZHTC1025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T C1
99	ZHTC1030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T C1
100	ZHTC2010T	C2	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T C2
101	ZHTC2012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T C2
102	ZHTC2014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T C2
103	ZHTC2016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T C2
104	ZHTC2018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T C2
105	ZHTC2020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T C2
106	ZHTC2022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T C2
107	ZHTC2025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T C2
108	ZHTC2030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T C2
109	ZHTC3010T	C3	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T C3
110	ZHTC3012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T C3
111	ZHTC3014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T C3
112	ZHTC3016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T C3

113	ZHTC3018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T C3
114	ZHTC3020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T C3
115	ZHTC3022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T C3
116	ZHTC3025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T C3
117	ZHTC3030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T C3
118	ZHTC4010T	C4	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T C4
119	ZHTC4012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T C4
120	ZHTC4014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T C4
121	ZHTC4016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T C4
122	ZHTC4018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T C4
123	ZHTC4020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T C4
124	ZHTC4022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T C4
125	ZHTC4025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T C4
126	ZHTC4030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T C4
127	ZHTD2010T	D2	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T D2
128	ZHTD2012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T D2
129	ZHTD2014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T D2
130	ZHTD2016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T D2
131	ZHTD2018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T D2
132	ZHTD2020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T D2
133	ZHTD2022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T D2
134	ZHTD2025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T D2
135	ZHTD2030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T D2
136	ZHTD3010T	D3	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T D3
137	ZHTD3012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T D3
138	ZHTD3014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T D3
139	ZHTD3016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T D3
140	ZHTD3018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T D3
141	ZHTD3020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T D3
142	ZHTD3022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T D3
143	ZHTD3025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T D3
144	ZHTD3030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T D3
145	ZHTD4010T	D4	-	98	10	-	-	260	Φ98 10T D4
146	ZHTD4012T		94.2	98	12	10	1	320	Φ98 12T D4
147	ZHTD4014T		94.2	98	14	10	2	365	Φ98 14T D4
148	ZHTD4016T		94.2	98	16	10	3	415	Φ98 16T D4
149	ZHTD4018T		94.2	98	18	10	4	470	Φ98 18T D4
150	ZHTD4020T		94.2	98	20	10	5	520	Φ98 20T D4
151	ZHTD4022T		94.2	98	22	10	6	570	Φ98 22T D4
152	ZHTD4025T		94.2	98	25	10	7.5	650	Φ98 25T D4
153	ZHTD4030T		94.2	98	30	10	10	770	Φ98 30T D4

Блок

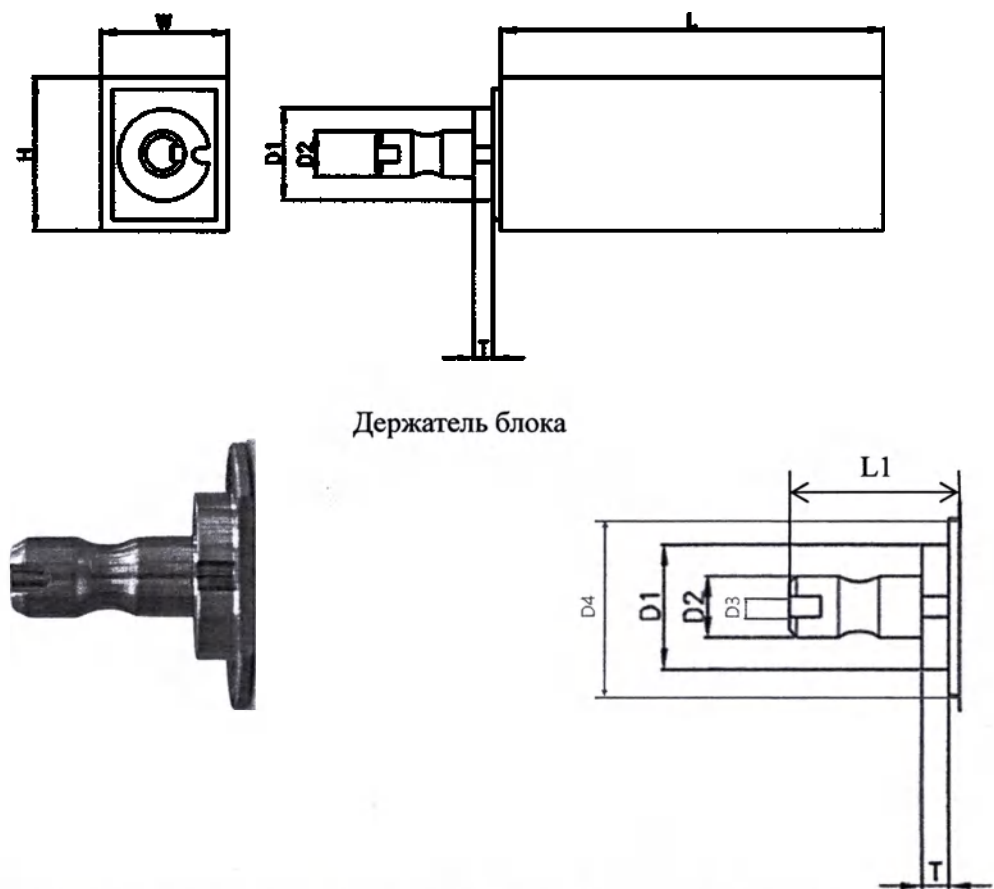

Держатель блока

Примечание: держатель используется для фиксации блока во фрезерном устройстве.

Единицы измерения: мм													
No.	Код	Оттенок	D1	D2	T	D3 (Ø)	D4 (Ø)	L1	L	H	W	Масса, г	Краткое описание
1	ZHTA0014B	A0	12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	14	13	13	8	A0 C14

2	ZHTA0015B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	18.5	15.5	14.5	14	A0 C15
3	ZHTA0020B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	20	19	15.5	20	A0 C20
4	ZHTA0040B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	15.5	14.5	30	A0 B40
5	ZHTA0041B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	19	15.5	40	A0 B40L
6	ZHTA0045B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	45	19	17	50	A0 B45
7	ZHTA0054B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	55	19	15.5	55	A0 B55(S)
8	ZHTA0055B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	19	15.5	55	A0 B55(L)
9	ZHTA0056B		12	5.9	2.5	2.0	23	16.2	55	22	25	105	A0 B55L(S)
10	ZHTA0057B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	22	25	105	A0 B55L(L)
11	ZHTA0065B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	25	22	125	A0 B65
12	ZHTA0066B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	40	17	155	A0 B65L
13	ZHTA0085B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	85	40	22	260	A0 B85
14	ZHTA1014B	A1	12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	14	13	13	8	A1 C14
15	ZHTA1015B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	18.5	15.5	14.5	14	A1 C15
16	ZHTA1020B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	20	19	15.5	20	A1 C20
17	ZHTA1040B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	15.5	14.5	30	A1 B40
18	ZHTA1041B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	19	15.5	40	A1 B40L
19	ZHTA1045B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	45	19	17	50	A1 B45
20	ZHTA1054B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	55	19	15.5	55	A1 B55(S)
21	ZHTA1055B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	19	15.5	55	A1 B55(L)
22	ZHTA1056B		12	5.9	2.5	2.0	23	16.2	55	22	25	105	A1 B55L(S)
23	ZHTA1057B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	22	25	105	A1 B55L(L)
24	ZHTA1065B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	25	22	125	A1 B65
25	ZHTA1066B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	40	17	155	A1 B65L
26	ZHTA1085B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	85	40	22	260	A1 B85
27	ZHTA2014B	A2	12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	14	13	13	8	A2 C14
28	ZHTA2015B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	18.5	15.5	14.5	14	A2 C15
29	ZHTA2020B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	20	19	15.5	20	A2 C20
30	ZHTA2040B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	15.5	14.5	30	A2 B40
31	ZHTA2041B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	19	15.5	40	A2 B40L
32	ZHTA2045B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	45	19	17	50	A2 B45
33	ZHTA2054B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	55	19	15.5	55	A2 B55(S)

34	ZHTA2055B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	19	15.5	55	A2 B55(L)
35	ZHTA2056B		12	5.9	2.5	2.0	23	16.2	55	22	25	105	A2 B55L(S)
36	ZHTA2057B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	22	25	105	A2 B55L(L)
37	ZHTA2065B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	25	22	125	A2 B65
38	ZHTA2066B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	40	17	155	A2 B65L
39	ZHTA2085B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	85	40	22	260	A2 B85
40	ZHTA3014B	A3	12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	14	13	13	8	A3 C14
41	ZHTA3015B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	18.5	15.5	14.5	14	A3 C15
42	ZHTA3020B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	20	19	15.5	20	A3 C20
43	ZHTA3040B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	15.5	14.5	30	A3 B40
44	ZHTA3041B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	19	15.5	40	A3 B40L
45	ZHTA3045B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	45	19	17	50	A3 B45
46	ZHTA3054B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	55	19	15.5	55	A3 B55(S)
47	ZHTA3055B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	19	15.5	55	A3 B55(L)
48	ZHTA3056B		12	5.9	2.5	2.0	23	16.2	55	22	25	105	A3 B55L(S)
49	ZHTA3057B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	22	25	105	A3 B55L(L)
50	ZHTA3065B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	25	22	125	A3 B65
51	ZHTA3066B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	40	17	155	A3 B65L
52	ZHTA3085B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	85	40	22	260	A3 B85
53	ZHTA3514B	A3.5	12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	14	13	13	8	A3.5 C14
54	ZHTA3515B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	18.5	15.5	14.5	14	A3.5 C15
55	ZHTA3520B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	20	19	15.5	20	A3.5 C20
56	ZHTA3540B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	15.5	14.5	30	A3.5 B40
57	ZHTA3541B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	19	15.5	40	A3.5 B40L
58	ZHTA3545B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	45	19	17	50	A3.5 B45
59	ZHTA3554B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	55	19	15.5	55	A3.5 B55(S)
60	ZHTA3555B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	19	15.5	55	A3.5 B55(L)
61	ZHTA3556B		12	5.9	2.5	2.0	23	16.2	55	22	25	105	A3.5 B55L(S)
62	ZHTA3557B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	22	25	105	A3.5 B55L(L)
63	ZHTA3565B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	25	22	125	A3.5 B65
64	ZHTA3566B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	40	17	155	A3.5 B65L
65	ZHTA3585B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	85	40	22	260	A3.5 B85

66	ZHTA4014B	A4	12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	14	13	13	8	A4 C14
67	ZHTA4015B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	18.5	15.5	14.5	14	A4 C15
68	ZHTA4020B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	20	19	15.5	20	A4 C20
69	ZHTA4040B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	15.5	14.5	30	A4 B40
70	ZHTA4041B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	19	15.5	40	A4 B40L
71	ZHTA4045B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	45	19	17	50	A4 B45
72	ZHTA4054B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	55	19	15.5	55	A4 B55(S)
73	ZHTA4055B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	19	15.5	55	A4 B55(L)
74	ZHTA4056B		12	5.9	2.5	2.0	23	16.2	55	22	25	105	A4 B55L(S)
75	ZHTA4057B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	22	25	105	A4 B55L(L)
76	ZHTA4065B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	25	22	125	A4 B65
77	ZHTA4066B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	40	17	155	A4 B65L
78	ZHTA4085B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	85	40	22	260	A4 B85
79	ZHTB1014B	B1	12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	14	13	13	8	B1 C14
80	ZHTB1015B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	18.5	15.5	14.5	14	B1 C15
81	ZHTB1020B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	20	19	15.5	20	B1 C20
82	ZHTB1040B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	15.5	14.5	30	B1 B40
83	ZHTB1041B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	19	15.5	40	B1 B40L
84	ZHTB1045B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	45	19	17	50	B1 B45
85	ZHTB1054B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	55	19	15.5	55	B1 B55(S)
86	ZHTB1055B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	19	15.5	55	B1 B55(L)
87	ZHTB1056B		12	5.9	2.5	2.0	23	16.2	55	22	25	105	B1 B55L(S)
88	ZHTB1057B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	22	25	105	B1 B55L(L)
89	ZHTB1065B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	25	22	125	B1 B65
90	ZHTB1066B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	40	17	155	B1 B65L
91	ZHTB1085B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	85	40	22	260	B1 B85
92	ZHTB2014B	B2	12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	14	13	13	8	B2 C14
93	ZHTB2015B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	18.5	15.5	14.5	14	B2 C15
94	ZHTB2020B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	20	19	15.5	20	B2 C20
95	ZHTB2040B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	15.5	14.5	30	B2 B40
96	ZHTB2041B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	19	15.5	40	B2 B40L
97	ZHTB2045B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	45	19	17	50	B2 B45

98	ZHTB2054B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	55	19	15.5	55	B2 B55(S)
99	ZHTB2055B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	19	15.5	55	B2 B55(L)
100	ZHTB2056B		12	5.9	2.5	2.0	23	16.2	55	22	25	105	B2 B55L(S)
101	ZHTB2057B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	22	25	105	B2 B55L(L)
102	ZHTB2065B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	25	22	125	B2 B65
103	ZHTB2066B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	40	17	155	B2 B65L
104	ZHTB2085B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	85	40	22	260	B2 B85
105	ZHTB3014B	B3	12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	14	13	13	8	B3 C14
106	ZHTB3015B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	18.5	15.5	14.5	14	B3 C15
107	ZHTB3020B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	20	19	15.5	20	B3 C20
108	ZHTB3040B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	15.5	14.5	30	B3 B40
109	ZHTB3041B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	19	15.5	40	B3 B40L
110	ZHTB3045B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	45	19	17	50	B3 B45
111	ZHTB3054B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	55	19	15.5	55	B3 B55(S)
112	ZHTB3055B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	19	15.5	55	B3 B55(L)
113	ZHTB3056B		12	5.9	2.5	2.0	23	16.2	55	22	25	105	B3 B55L(S)
114	ZHTB3057B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	22	25	105	B3 B55L(L)
115	ZHTB3065B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	25	22	125	B3 B65
116	ZHTB3066B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	40	17	155	B3 B65L
117	ZHTB3085B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	85	40	22	260	B3 B85
118	ZHTB4014B	B4	12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	14	13	13	8	B4 C14
119	ZHTB4015B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	18.5	15.5	14.5	14	B4 C15
120	ZHTB4020B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	20	19	15.5	20	B4 C20
121	ZHTB4040B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	15.5	14.5	30	B4 B40
122	ZHTB4041B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	19	15.5	40	B4 B40L
123	ZHTB4045B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	45	19	17	50	B4 B45
124	ZHTB4054B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	55	19	15.5	55	B4 B55(S)
125	ZHTB4055B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	19	15.5	55	B4 B55(L)
126	ZHTB4056B		12	5.9	2.5	2.0	23	16.2	55	22	25	105	B4 B55L(S)
127	ZHTB4057B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	22	25	105	B4 B55L(L)
128	ZHTB4065B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	25	22	125	B4 B65
129	ZHTB4066B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	40	17	155	B4 B65L

130	ZHTB4085B	C1	20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	85	40	22	260	B4 B85
131	ZHTC1014B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	14	13	13	8	C1 C14
132	ZHTC1015B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	18.5	15.5	14.5	14	C1 C15
133	ZHTC1020B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	20	19	15.5	20	C1 C20
134	ZHTC1040B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	15.5	14.5	30	C1 B40
135	ZHTC1041B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	19	15.5	40	C1 B40L
136	ZHTC1045B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	45	19	17	50	C1 B45
137	ZHTC1054B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	55	19	15.5	55	C1 B55(S)
138	ZHTC1055B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	19	15.5	55	C1 B55(L)
139	ZHTC1056B		12	5.9	2.5	2.0	23	16.2	55	22	25	105	C1 B55L(S)
140	ZHTC1057B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	22	25	105	C1 B55L(L)
141	ZHTC1065B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	25	22	125	C1 B65
142	ZHTC1066B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	40	17	155	C1 B65L
143	ZHTC1085B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	85	40	22	260	C1 B85
144	ZHTC2014B	C2	12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	14	13	13	8	C2 C14
145	ZHTC2015B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	18.5	15.5	14.5	14	C2 C15
146	ZHTC2020B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	20	19	15.5	20	C2 C20
147	ZHTC2040B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	15.5	14.5	30	C2 B40
148	ZHTC2041B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	19	15.5	40	C2 B40L
149	ZHTC2045B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	45	19	17	50	C2 B45
150	ZHTC2054B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	55	19	15.5	55	C2 B55(S)
151	ZHTC2055B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	19	15.5	55	C2 B55(L)
152	ZHTC2056B		12	5.9	2.5	2.0	23	16.2	55	22	25	105	C2 B55L(S)
153	ZHTC2057B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	22	25	105	C2 B55L(L)
154	ZHTC2065B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	25	22	125	C2 B65
155	ZHTC2066B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	40	17	155	C2 B65L
156	ZHTC2085B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	85	40	22	260	C2 B85
157	ZHTC3014B	C3	12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	14	13	13	8	C3 C14
158	ZHTC3015B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	18.5	15.5	14.5	14	C3 C15
159	ZHTC3020B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	20	19	15.5	20	C3 C20
160	ZHTC3040B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	15.5	14.5	30	C3 B40
161	ZHTC3041B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	19	15.5	40	C3 B40L

162	ZHTC3045B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	45	19	17	50	C3 B45
163	ZHTC3054B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	55	19	15.5	55	C3 B55(S)
164	ZHTC3055B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	19	15.5	55	C3 B55(L)
165	ZHTC3056B		12	5.9	2.5	2.0	23	16.2	55	22	25	105	C3 B55L(S)
166	ZHTC3057B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	22	25	105	C3 B55L(L)
167	ZHTC3065B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	25	22	125	C3 B65
168	ZHTC3066B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	40	17	155	C3 B65L
169	ZHTC3085B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	85	40	22	260	C3 B85
170	ZHTC4014B	C4	12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	14	13	13	8	C4 C14
171	ZHTC4015B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	18.5	15.5	14.5	14	C4 C15
172	ZHTC4020B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	20	19	15.5	20	C4 C20
173	ZHTC4040B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	15.5	14.5	30	C4 B40
174	ZHTC4041B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	19	15.5	40	C4 B40L
175	ZHTC4045B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	45	19	17	50	C4 B45
176	ZHTC4054B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	55	19	15.5	55	C4 B55(S)
177	ZHTC4055B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	19	15.5	55	C4 B55(L)
178	ZHTC4056B		12	5.9	2.5	2.0	23	16.2	55	22	25	105	C4 B55L(S)
179	ZHTC4057B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	22	25	105	C4 B55L(L)
180	ZHTC4065B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	25	22	125	C4 B65
181	ZHTC4066B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	40	17	155	C4 B65L
182	ZHTC4085B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	85	40	22	260	C4 B85
183	ZHTD2014B	D2	12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	14	13	13	8	D2 C14
184	ZHTD2015B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	18.5	15.5	14.5	14	D2 C15
185	ZHTD2020B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	20	19	15.5	20	D2 C20
186	ZHTD2040B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	15.5	14.5	30	D2 B40
187	ZHTD2041B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	19	15.5	40	D2 B40L
188	ZHTD2045B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	45	19	17	50	D2 B45
189	ZHTD2054B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	55	19	15.5	55	D2 B55(S)
190	ZHTD2055B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	19	15.5	55	D2 B55(L)
191	ZHTD2056B		12	5.9	2.5	2.0	23	16.2	55	22	25	105	D2 B55L(S)
192	ZHTD2057B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	22	25	105	D2 B55L(L)
193	ZHTD2065B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	25	22	125	D2 B65

194	ZHTD2066B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	40	17	155	D2 B65L
195	ZHTD2085B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	85	40	22	260	D2 B85
196	ZHTD3014B	D3	12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	14	13	13	8	D3 C14
197	ZHTD3015B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	18.5	15.5	14.5	14	D3 C15
198	ZHTD3020B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	20	19	15.5	20	D3 C20
199	ZHTD3040B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	15.5	14.5	30	D3 B40
200	ZHTD3041B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	19	15.5	40	D3 B40L
201	ZHTD3045B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	45	19	17	50	D3 B45
202	ZHTD3054B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	55	19	15.5	55	D3 B55(S)
203	ZHTD3055B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	19	15.5	55	D3 B55(L)
204	ZHTD3056B		12	5.9	2.5	2.0	23	16.2	55	22	25	105	D3 B55L(S)
205	ZHTD3057B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	22	25	105	D3 B55L(L)
206	ZHTD3065B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	25	22	125	D3 B65
207	ZHTD3066B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	40	17	155	D3 B65L
208	ZHTD3085B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	85	40	22	260	D3 B85
209	ZHTD4014B	D4	12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	14	13	13	8	D4 C14
210	ZHTD4015B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	18.5	15.5	14.5	14	D4 C15
211	ZHTD4020B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	20	19	15.5	20	D4 C20
212	ZHTD4040B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	15.5	14.5	30	D4 B40
213	ZHTD4041B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	40	19	15.5	40	D4 B40L
214	ZHTD4045B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	45	19	17	50	D4 B45
215	ZHTD4054B		12	5.9	2.5	2.0	19	16.2	55	19	15.5	55	D4 B55(S)
216	ZHTD4055B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	19	15.5	55	D4 B55(L)
217	ZHTD4056B		12	5.9	2.5	2.0	23	16.2	55	22	25	105	D4 B55L(S)
218	ZHTD4057B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	55	22	25	105	D4 B55L(L)
219	ZHTD4065B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	25	22	125	D4 B65
220	ZHTD4066B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	65	40	17	155	D4 B65L
221	ZHTD4085B		20	9.85	2.6	2.0	23	16.2	85	40	22	260	D4 B85

Компоненты

№.	Код	Оттенок	Компоненты
1	ZHTA0014BS	A0	ZHTA0014B x 5 шт
2	ZHTA0015BS		ZHTA0015B x 5 шт
3	ZHTA0020BS		ZHTA0020B x 5 шт
4	ZHTA0040BS		ZHTA0040B x 6 шт
5	ZHTA0041BS		ZHTA0041B x 6 шт
6	ZHTA0045BS		ZHTA0045B x 4 шт
7	ZHTA0054BS		ZHTA0054B x 4 шт
8	ZHTA0055BS		ZHTA0055B x 4 шт
9	ZHTA0056BS		ZHTA0056B x 4 шт
10	ZHTA0057BS		ZHTA0057B x 4 шт
11	ZHTA0065BS		ZHTA0065B x 1 шт
12	ZHTA0066BS		ZHTA0066B x 1 шт
13	ZHTA0085BS		ZHTA0085B x 1 шт
14	ZHTA1014BS	A1	ZHTA1014B x 5 шт
15	ZHTA1015BS		ZHTA1015B x 5 шт
16	ZHTA1020BS		ZHTA1020B x 5 шт
17	ZHTA1040BS		ZHTA1040B x 6 шт
18	ZHTA1041BS		ZHTA1041B x 6 шт
19	ZHTA1045BS		ZHTA1045B x 4 шт
20	ZHTA1054BS		ZHTA1054B x 4 шт
21	ZHTA1055BS		ZHTA1055B x 4 шт
22	ZHTA1056BS		ZHTA1056B x 4 шт
23	ZHTA1057BS		ZHTA1057B x 4 шт
24	ZHTA1065BS		ZHTA1065B x 1 шт
25	ZHTA1066BS		ZHTA1066B x 1 шт
26	ZHTA1085BS		ZHTA1085B x 1 шт
27	ZHTA2014BS	A2	ZHTA2014B x 5 шт
28	ZHTA2015BS		ZHTA2015B x 5 шт
29	ZHTA2020BS		ZHTA2020B x 5 шт
30	ZHTA2040BS		ZHTA2040B x 6 шт
31	ZHTA2041BS		ZHTA2041B x 6 шт
32	ZHTA2045BS		ZHTA2045B x 4 шт
33	ZHTA2054BS		ZHTA2054B x 4 шт
34	ZHTA2055BS		ZHTA2055B x 4 шт
35	ZHTA2056BS		ZHTA2056B x 4 шт
36	ZHTA2057BS		ZHTA2057B x 4 шт
37	ZHTA2065BS		ZHTA2065B x 1 шт
38	ZHTA2066BS		ZHTA2066B x 1 шт
39	ZHTA2085BS		ZHTA2085B x 1 шт
40	ZHTA3014BS	A3	ZHTA3014B x 5 шт
41	ZHTA3015BS		ZHTA3015B x 5 шт
42	ZHTA3020BS		ZHTA3020B x 5 шт
43	ZHTA3040BS		ZHTA3040B x 6 шт
44	ZHTA3041BS		ZHTA3041B x 6 шт
45	ZHTA3045BS		ZHTA3045B x 4 шт
46	ZHTA3054BS		ZHTA3054B x 4 шт
47	ZHTA3055BS		ZHTA3055B x 4 шт
48	ZHTA3056BS		ZHTA3056B x 4 шт

49	ZHTA3057BS		ZHTA3057B x 4 шт
50	ZHTA3065BS		ZHTA3065B x 1 шт
51	ZHTA3066BS		ZHTA3066B x 1 шт
52	ZHTA3085BS		ZHTA3085B x 1 шт
53	ZHTA3514BS	A3.5	ZHTA3514B x 5 шт
54	ZHTA3515BS		ZHTA3515B x 5 шт
55	ZHTA3520BS		ZHTA3520B x 5 шт
56	ZHTA3540BS		ZHTA3540B x 6 шт
57	ZHTA3541BS		ZHTA3541B x 6 шт
58	ZHTA3545BS		ZHTA3545B x 4 шт
59	ZHTA3554BS		ZHTA3554B x 4 шт
60	ZHTA3555BS		ZHTA3555B x 4 шт
61	ZHTA3556BS		ZHTA3556B x 4 шт
62	ZHTA3557BS		ZHTA3557B x 4 шт
63	ZHTA3565BS		ZHTA3565B x 1 шт
64	ZHTA3566BS		ZHTA3566B x 1 шт
65	ZHTA3585BS		ZHTA3585B x 1 шт
66	ZHTA4014BS	A4	ZHTA4014B x 5 шт
67	ZHTA4015BS		ZHTA4015B x 5 шт
68	ZHTA4020BS		ZHTA4020B x 5 шт
69	ZHTA4040BS		ZHTA4040B x 6 шт
70	ZHTA4041BS		ZHTA4041B x 6 шт
71	ZHTA4045BS		ZHTA4045B x 4 шт
72	ZHTA4054BS		ZHTA4054B x 4 шт
73	ZHTA4055BS		ZHTA4055B x 4 шт
74	ZHTA4056BS		ZHTA4056B x 4 шт
75	ZHTA4057BS		ZHTA4057B x 4 шт
76	ZHTA4065BS		ZHTA4065B x 1 шт
77	ZHTA4066BS		ZHTA4066B x 1 шт
78	ZHTA4085BS		ZHTA4085B x 1 шт
79	ZHTB1014BS	B1	ZHTB1014B x 5 шт
80	ZHTB1015BS		ZHTB1015B x 5 шт
81	ZHTB1020BS		ZHTB1020B x 5 шт
82	ZHTB1040BS		ZHTB1040B x 6 шт
83	ZHTB1041BS		ZHTB1041B x 6 шт
84	ZHTB1045BS		ZHTB1045B x 4 шт
85	ZHTB1054BS		ZHTB1054B x 4 шт
86	ZHTB1055BS		ZHTB1055B x 4 шт
87	ZHTB1056BS		ZHTB1056B x 4 шт
88	ZHTB1057BS		ZHTB1057B x 4 шт
89	ZHTB1065BS		ZHTB1065B x 1 шт
90	ZHTB1066BS		ZHTB1066B x 1 шт
91	ZHTB1085BS		ZHTB1085B x 1 шт
92	ZHTB2014BS	B2	ZHTB2014B x 5 шт
93	ZHTB2015BS		ZHTB2015B x 5 шт
94	ZHTB2020BS		ZHTB2020B x 5 шт
95	ZHTB2040BS		ZHTB2040B x 6 шт
96	ZHTB2041BS		ZHTB2041B x 6 шт
97	ZHTB2045BS		ZHTB2045B x 4 шт
98	ZHTB2054BS		ZHTB2054B x 4 шт


99	ZHTB2055BS		ZHTB2055B x 4 шт
100	ZHTB2056BS		ZHTB2056B x 4 шт
101	ZHTB2057BS		ZHTB2057B x 4 шт
102	ZHTB2065BS		ZHTB2065B x 1 шт
103	ZHTB2066BS		ZHTB2066B x 1 шт
104	ZHTB2085BS		ZHTB2085B x 1 шт
105	ZHTB3014BS	B3	ZHTB3014B x 5 шт
106	ZHTB3015BS		ZHTB3015B x 5 шт
107	ZHTB3020BS		ZHTB3020B x 5 шт
108	ZHTB3040BS		ZHTB3040B x 6 шт
109	ZHTB3041BS		ZHTB3041B x 6 шт
110	ZHTB3045BS		ZHTB3045B x 4 шт
111	ZHTB3054BS		ZHTB3054B x 4 шт
112	ZHTB3055BS		ZHTB3055B x 4 шт
113	ZHTB3056BS		ZHTB3056B x 4 шт
114	ZHTB3057BS		ZHTB3057B x 4 шт
115	ZHTB3065BS		ZHTB3065B x 1 шт
116	ZHTB3066BS		ZHTB3066B x 1 шт
117	ZHTB3085BS		ZHTB3085B x 1 шт
118	ZHTB4014BS	B4	ZHTB4014B x 5 шт
119	ZHTB4015BS		ZHTB4015B x 5 шт
120	ZHTB4020BS		ZHTB4020B x 5 шт
121	ZHTB4040BS		ZHTB4040B x 6 шт
122	ZHTB4041BS		ZHTB4041B x 6 шт
123	ZHTB4045BS		ZHTB4045B x 4 шт
124	ZHTB4054BS		ZHTB4054B x 4 шт
125	ZHTB4055BS		ZHTB4055B x 4 шт
126	ZHTB4056BS		ZHTB4056B x 4 шт
127	ZHTB4057BS		ZHTB4057B x 4 шт
128	ZHTB4065BS		ZHTB4065B x 1 шт
129	ZHTB4066BS		ZHTB4066B x 1 шт
130	ZHTB4085BS		ZHTB4085B x 1 шт
131	ZHTC1014BS	C1	ZHTC1014B x 5 шт
132	ZHTC1015BS		ZHTC1015B x 5 шт
133	ZHTC1020BS		ZHTC1020B x 5 шт
134	ZHTC1040BS		ZHTC1040B x 6 шт
135	ZHTC1041BS		ZHTC1041B x 6 шт
136	ZHTC1045BS		ZHTC1045B x 4 шт
137	ZHTC1054BS		ZHTC1054B x 4 шт
138	ZHTC1055BS		ZHTC1055B x 4 шт
139	ZHTC1056BS		ZHTC1056B x 4 шт
140	ZHTC1057BS		ZHTC1057B x 4 шт
141	ZHTC1065BS		ZHTC1065B x 1 шт
142	ZHTC1066BS		ZHTC1066B x 1 шт
143	ZHTC1085BS		ZHTC1085B x 1 шт
144	ZHTC2014BS	C2	ZHTC2014B x 5 шт
145	ZHTC2015BS		ZHTC2015B x 5 шт
146	ZHTC2020BS		ZHTC2020B x 5 шт
147	ZHTC2040BS		ZHTC2040B x 6 шт
148	ZHTC2041BS		ZHTC2041B x 6 шт

149	ZHTC2045BS		ZHTC2045B x 4 шт
150	ZHTC2054BS		ZHTC2054B x 4 шт
151	ZHTC2055BS		ZHTC2055B x 4 шт
152	ZHTC2056BS		ZHTC2056B x 4 шт
153	ZHTC2057BS		ZHTC2057B x 4 шт
154	ZHTC2065BS		ZHTC2065B x 1 шт
155	ZHTC2066BS		ZHTC2066B x 1 шт
156	ZHTC2085BS		ZHTC2085B x 1 шт
157	ZHTC3014BS	C3	ZHTC3014B x 5 шт
158	ZHTC3015BS		ZHTC3015B x 5 шт
159	ZHTC3020BS		ZHTC3020B x 5 шт
160	ZHTC3040BS		ZHTC3040B x 6 шт
161	ZHTC3041BS		ZHTC3041B x 6 шт
162	ZHTC3045BS		ZHTC3045B x 4 шт
163	ZHTC3054BS		ZHTC3054B x 4 шт
164	ZHTC3055BS		ZHTC3055B x 4 шт
165	ZHTC3056BS		ZHTC3056B x 4 шт
166	ZHTC3057BS		ZHTC3057B x 4 шт
167	ZHTC3065BS		ZHTC3065B x 1 шт
168	ZHTC3066BS		ZHTC3066B x 1 шт
169	ZHTC3085BS	C4	ZHTC3085B x 1 шт
170	ZHTC4014BS		ZHTC4014B x 5 шт
171	ZHTC4015BS		ZHTC4015B x 5 шт
172	ZHTC4020BS		ZHTC4020B x 5 шт
173	ZHTC4040BS		ZHTC4040B x 6 шт
174	ZHTC4041BS		ZHTC4041B x 6 шт
175	ZHTC4045BS		ZHTC4045B x 4 шт
176	ZHTC4054BS		ZHTC4054B x 4 шт
177	ZHTC4055BS		ZHTC4055B x 4 шт
178	ZHTC4056BS		ZHTC4056B x 4 шт
179	ZHTC4057BS		ZHTC4057B x 4 шт
180	ZHTC4065BS		ZHTC4065B x 1 шт
181	ZHTC4066BS		ZHTC4066B x 1 шт
182	ZHTC4085BS	D2	ZHTC4085B x 1 шт
183	ZHTD2014BS		ZHTD2014B x 5 шт
184	ZHTD2015BS		ZHTD2015B x 5 шт
185	ZHTD2020BS		ZHTD2020B x 5 шт
186	ZHTD2040BS		ZHTD2040B x 6 шт
187	ZHTD2041BS		ZHTD2041B x 6 шт
188	ZHTD2045BS		ZHTD2045B x 4 шт
189	ZHTD2054BS		ZHTD2054B x 4 шт
190	ZHTD2055BS		ZHTD2055B x 4 шт
191	ZHTD2056BS		ZHTD2056B x 4 шт
192	ZHTD2057BS		ZHTD2057B x 4 шт
193	ZHTD2065BS		ZHTD2065B x 1 шт
194	ZHTD2066BS		ZHTD2066B x 1 шт
195	ZHTD2085BS	D3	ZHTD2085B x 1 шт
196	ZHTD3014BS		ZHTD3014B x 5 шт
197	ZHTD3015BS		ZHTD3015B x 5 шт
198	ZHTD3020BS		ZHTD3020B x 5 шт

199	ZHTD3040BS		ZHTD3040B x 6 шт
200	ZHTD3041BS		ZHTD3041B x 6 шт
201	ZHTD3045BS		ZHTD3045B x 4 шт
202	ZHTD3054BS		ZHTD3054B x 4 шт
203	ZHTD3055BS		ZHTD3055B x 4 шт
204	ZHTD3056BS		ZHTD3056B x 4 шт
205	ZHTD3057BS		ZHTD3057B x 4 шт
206	ZHTD3065BS		ZHTD3065B x 1 шт
207	ZHTD3066BS		ZHTD3066B x 1 шт
208	ZHTD3085BS		ZHTD3085B x 1 шт
209	ZHTD4014BS	D4	ZHTD4014B x 5 шт
210	ZHTD4015BS		ZHTD4015B x 5 шт
211	ZHTD4020BS		ZHTD4020B x 5 шт
212	ZHTD4040BS		ZHTD4040B x 6 шт
213	ZHTD4041BS		ZHTD4041B x 6 шт
214	ZHTD4045BS		ZHTD4045B x 4 шт
215	ZHTD4054BS		ZHTD4054B x 4 шт
216	ZHTD4055BS		ZHTD4055B x 4 шт
217	ZHTD4056BS		ZHTD4056B x 4 шт
218	ZHTD4057BS		ZHTD4057B x 4 шт
219	ZHTD4065BS		ZHTD4065B x 1 шт
220	ZHTD4066BS		ZHTD4066B x 1 шт
221	ZHTD4085BS		ZHTD4085B x 1 шт

3) Estar-Z ST

Estar-Z ST представляет собой керамические диски из диоксида циркония, используемые для изготовления зубных протезов, таких как вкладки, искусственные зубы, коронки и мосты, с использованием фрезерных систем CAD/CAM, в соответствии с типом II, классом 4 и b) по ISO 6872. Они бывают только одного типа (диск) и обычно используются для задних зубов.

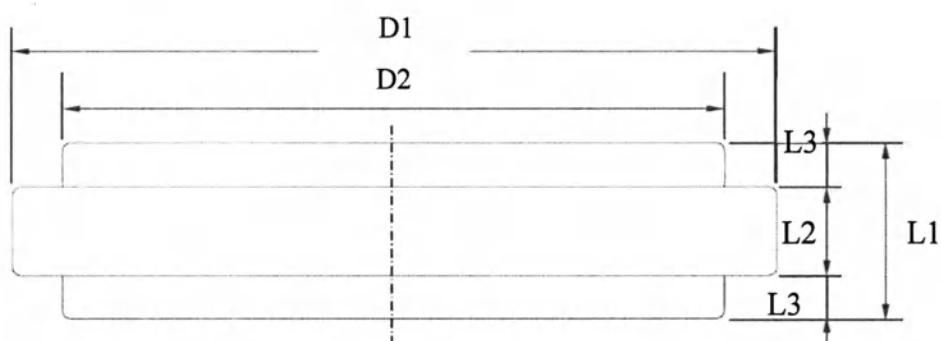

Единица измерения: мм

No.	Код	Оттенок	D1	D2	L1	L2	L3	Масса, г	Краткое описание
1	ZSTA0010T	A0	98	-	10	-	-	260	Ф98 10Т А0
2	ZSTA0012T		98	94.2	12	10	1	320	Ф98 12Т А0
3	ZSTA0014T		98	94.2	14	10	2	365	Ф98 14Т А0
4	ZSTA0016T		98	94.2	16	10	3	415	Ф98 16Т А0
5	ZSTA0018T		98	94.2	18	10	4	470	Ф98 18Т А0
6	ZSTA0020T		98	94.2	20	10	5	520	Ф98 20Т А0
7	ZSTA0022T		98	94.2	22	10	6	570	Ф98 22Т А0

8	ZSTA0025T		98	94.2	25	10	7.5	650	Φ98 25T A0
9	ZSTA1010T	A1	98	-	10	-	-	260	Φ98 10T A1
10	ZSTA1012T		98	94.2	12	10	1	320	Φ98 12T A1
11	ZSTA1014T		98	94.2	14	10	2	365	Φ98 14T A1
12	ZSTA1016T		98	94.2	16	10	3	415	Φ98 16T A1
13	ZSTA1018T		98	94.2	18	10	4	470	Φ98 18T A1
14	ZSTA1020T		98	94.2	20	10	5	520	Φ98 20T A1
15	ZSTA1022T		98	94.2	22	10	6	570	Φ98 22T A1
16	ZSTA1025T		98	94.2	25	10	7.5	650	Φ98 25T A1
17	ZSTA2010T	A2	98	-	10	-	-	260	Φ98 10T A2
18	ZSTA2012T		98	94.2	12	10	1	320	Φ98 12T A2
19	ZSTA2014T		98	94.2	14	10	2	365	Φ98 14T A2
20	ZSTA2016T		98	94.2	16	10	3	415	Φ98 16T A2
21	ZSTA2018T		98	94.2	18	10	4	470	Φ98 18T A2
22	ZSTA2020T		98	94.2	20	10	5	520	Φ98 20T A2
23	ZSTA2022T		98	94.2	22	10	6	570	Φ98 22T A2
24	ZSTA2025T		98	94.2	25	10	7.5	650	Φ98 25T A2
25	ZSTA3010T	A3	98	-	10	-	-	260	Φ98 10T A3
26	ZSTA3012T		98	94.2	12	10	1	320	Φ98 12T A3
27	ZSTA3014T		98	94.2	14	10	2	365	Φ98 14T A3
28	ZSTA3016T		98	94.2	16	10	3	415	Φ98 16T A3
29	ZSTA3018T		98	94.2	18	10	4	470	Φ98 18T A3
30	ZSTA3020T		98	94.2	20	10	5	520	Φ98 20T A3
31	ZSTA3022T		98	94.2	22	10	6	570	Φ98 22T A3
32	ZSTA3025T		98	94.2	25	10	7.5	650	Φ98 25T A3
33	ZSTA3510T	A3.5	98	-	10	-	-	260	Φ98 10T A3.5
34	ZSTA3512T		98	94.2	12	10	1	320	Φ98 12T A3.5
35	ZSTA3514T		98	94.2	14	10	2	365	Φ98 14T A3.5
36	ZSTA3516T		98	94.2	16	10	3	415	Φ98 16T A3.5
37	ZSTA3518T		98	94.2	18	10	4	470	Φ98 18T A3.5
38	ZSTA3520T		98	94.2	20	10	5	520	Φ98 20T A3.5
39	ZSTA3522T		98	94.2	22	10	6	570	Φ98 22T A3.5
40	ZSTA3525T		98	94.2	25	10	7.5	650	Φ98 25T A3.5
41	ZSTA4010T	A4	98	-	10	-	-	260	Φ98 10T A4
42	ZSTA4012T		98	94.2	12	10	1	320	Φ98 12T A4
43	ZSTA4014T		98	94.2	14	10	2	365	Φ98 14T A4
44	ZSTA4016T		98	94.2	16	10	3	415	Φ98 16T A4
45	ZSTA4018T		98	94.2	18	10	4	470	Φ98 18T A4
46	ZSTA4020T		98	94.2	20	10	5	520	Φ98 20T A4
47	ZSTA4022T		98	94.2	22	10	6	570	Φ98 22T A4
48	ZSTA4025T		98	94.2	25	10	7.5	650	Φ98 25T A4
49	ZSTB1010T	B1	98	-	10	-	-	260	Φ98 10T B1
50	ZSTB1012T		98	94.2	12	10	1	320	Φ98 12T B1
51	ZSTB1014T		98	94.2	14	10	2	365	Φ98 14T B1
52	ZSTB1016T		98	94.2	16	10	3	415	Φ98 16T B1
53	ZSTB1018T		98	94.2	18	10	4	470	Φ98 18T B1
54	ZSTB1020T		98	94.2	20	10	5	520	Φ98 20T B1
55	ZSTB1022T		98	94.2	22	10	6	570	Φ98 22T B1
56	ZSTB1025T		98	94.2	25	10	7.5	650	Φ98 25T B1
57	ZSTB2010T	B2	98	-	10	-	-	260	Φ98 10T B2

58	ZSTB2012T		98	94.2	12	10	1	320	Φ98 12T B2
59	ZSTB2014T		98	94.2	14	10	2	365	Φ98 14T B2
60	ZSTB2016T		98	94.2	16	10	3	415	Φ98 16T B2
61	ZSTB2018T		98	94.2	18	10	4	470	Φ98 18T B2
62	ZSTB2020T		98	94.2	20	10	5	520	Φ98 20T B2
63	ZSTB2022T		98	94.2	22	10	6	570	Φ98 22T B2
64	ZSTB2025T		98	94.2	25	10	7.5	650	Φ98 25T B2
65	ZSTB3010T	B3	98	-	10	-	-	260	Φ98 10T B3
66	ZSTB3012T		98	94.2	12	10	1	320	Φ98 12T B3
67	ZSTB3014T		98	94.2	14	10	2	365	Φ98 14T B3
68	ZSTB3016T		98	94.2	16	10	3	415	Φ98 16T B3
69	ZSTB3018T		98	94.2	18	10	4	470	Φ98 18T B3
70	ZSTB3020T		98	94.2	20	10	5	520	Φ98 20T B3
71	ZSTB3022T		98	94.2	22	10	6	570	Φ98 22T B3
72	ZSTB3025T		98	94.2	25	10	7.5	650	Φ98 25T B3
73	ZSTB4010T	B4	98	-	10	-	-	260	Φ98 10T B4
74	ZSTB4012T		98	94.2	12	10	1	320	Φ98 12T B4
75	ZSTB4014T		98	94.2	14	10	2	365	Φ98 14T B4
76	ZSTB4016T		98	94.2	16	10	3	415	Φ98 16T B4
77	ZSTB4018T		98	94.2	18	10	4	470	Φ98 18T B4
78	ZSTB4020T		98	94.2	20	10	5	520	Φ98 20T B4
79	ZSTB4022T		98	94.2	22	10	6	570	Φ98 22T B4
80	ZSTB4025T		98	94.2	25	10	7.5	650	Φ98 25T B4
81	ZSTC1010T	C1	98	-	10	-	-	260	Φ98 10T C1
82	ZSTC1012T		98	94.2	12	10	1	320	Φ98 12T C1
83	ZSTC1014T		98	94.2	14	10	2	365	Φ98 14T C1
84	ZSTC1016T		98	94.2	16	10	3	415	Φ98 16T C1
85	ZSTC1018T		98	94.2	18	10	4	470	Φ98 18T C1
86	ZSTC1020T		98	94.2	20	10	5	520	Φ98 20T C1
87	ZSTC1022T		98	94.2	22	10	6	570	Φ98 22T C1
88	ZSTC1025T		98	94.2	25	10	7.5	650	Φ98 25T C1
89	ZSTC2010T	C2	98	-	10	-	-	260	Φ98 10T C2
90	ZSTC2012T		98	94.2	12	10	1	320	Φ98 12T C2
91	ZSTC2014T		98	94.2	14	10	2	365	Φ98 14T C2
92	ZSTC2016T		98	94.2	16	10	3	415	Φ98 16T C2
93	ZSTC2018T		98	94.2	18	10	4	470	Φ98 18T C2
94	ZSTC2020T		98	94.2	20	10	5	520	Φ98 20T C2
95	ZSTC2022T		98	94.2	22	10	6	570	Φ98 22T C2
96	ZSTC2025T		98	94.2	25	10	7.5	650	Φ98 25T C2
97	ZSTD2010T	D2	98	-	10	-	-	260	Φ98 10T D2
98	ZSTD2012T		98	94.2	12	10	1	320	Φ98 12T D2
99	ZSTD2014T		98	94.2	14	10	2	365	Φ98 14T D2
100	ZSTD2016T		98	94.2	16	10	3	415	Φ98 16T D2
101	ZSTD2018T		98	94.2	18	10	4	470	Φ98 18T D2
102	ZSTD2020T		98	94.2	20	10	5	520	Φ98 20T D2
103	ZSTD2022T		98	94.2	22	10	6	570	Φ98 22T D2
104	ZSTD2025T		98	94.2	25	10	7.5	650	Φ98 25T D2
105	ZSTD3010T	D3	98	-	10	-	-	260	Φ98 10T D3
106	ZSTD3012T		98	94.2	12	10	1	320	Φ98 12T D3
107	ZSTD3014T		98	94.2	14	10	2	365	Φ98 14T D3

108	ZSTD3016T		98	94.2	16	10	3	415	Ø98 16T D3
109	ZSTD3018T		98	94.2	18	10	4	470	Ø98 18T D3
110	ZSTD3020T		98	94.2	20	10	5	520	Ø98 20T D3
111	ZSTD3022T		98	94.2	22	10	6	570	Ø98 22T D3
112	ZSTD3025T		98	94.2	25	10	7.5	650	Ø98 25T D3
113	ZSTD4010T	D4	98	-	10	-	-	260	Ø98 10T D4
114	ZSTD4012T		98	94.2	12	10	1	320	Ø98 12T D4
115	ZSTD4014T		98	94.2	14	10	2	365	Ø98 14T D4
116	ZSTD4016T		98	94.2	16	10	3	415	Ø98 16T D4
117	ZSTD4018T		98	94.2	18	10	4	470	Ø98 18T D4
118	ZSTD4020T		98	94.2	20	10	5	520	Ø98 20T D4
119	ZSTD4022T		98	94.2	22	10	6	570	Ø98 22T D4
120	ZSTD4025T		98	94.2	25	10	7.5	650	Ø98 25T D4

Каждый вариант исполнения поставляется с инструкцией по применению.

МАТЕРИАЛЫ

1)	Диоксид циркония
2)	Оксид железа (III)
3)	Оксид эрбия (III)
4)	Оксид кобальта (II,III)
5)	Нержавеющая сталь sus304*
6)	Алюминиевый сплав А2011*

*Применимо для блока Estar-Z HT

Перечень национальных и международных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие.

Стандарт	Название
ISO 13485:2016	Медицинские изделия. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования
ISO 9001:2015	Системы менеджмента качества – Требования
MEDDEV 2.7.1 Ред. 4 Клиническая оценка	Руководство для производителей и уполномоченных органов
MDD 93/42/EEC Приложение X	Основные требования для клинической оценки
EN ISO 10993-1:2009	Биологическая оценка медицинских изделий - Часть 1: Оценка и испытания в рамках процесса управления рисками
EN ISO 14971:2012	Медицинские изделия – Применение управления рисками к медицинским изделиям
ISO 6872:2015	Стоматология — Керамические материалы
ISO 13356:2015	Имплантаты для хирургии — Керамические материалы на основе тетрагонального диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия (Y-TZP)
ISO 10993-5:2009	БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ — ЧАСТЬ 5: ИСПЫТАНИЯ IN VITRO НА ЦИТОТОКСИЧНОСТЬ
ISO 10993-10:2002	БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ — ЧАСТЬ 10: ИСПЫТАНИЯ НА РАЗДРАЖЕНИЕ И ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗАМЕДЛЕННОГО ТИПА
ISO 10993-11:2006	БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ — ЧАСТЬ 11: ИСПЫТАНИЯ НА СИСТЕМНУЮ ТОКСИЧНОСТЬ
EN ISO 15223-1:2021	Медицинские изделия. Символы, используемые на этикетках медицинских изделий, в маркировке и представляемой информации. Часть 1: Общие требования
EN 1041:2008	Информация, предоставленная производителем медицинских изделий
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска
ГОСТ ISO 10993-11-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия
ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными
ГОСТ ISO 10993-5-2023	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro
ГОСТ ISO 10993-10-2023	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсibilизирующего действия

ГОСТ ISO 10993-12-2023	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Отбор и подготовка образцов для проведения исследований
ГОСТ ISO 10993-23-2023	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 23. Исследования раздражающего действия
ГОСТ Р 52770-2023	Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности
ГОСТ 31214-2016	Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность
ГОСТ 31571-2012	Керамика стоматологическая. Технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования

서울 서초구 서초대로49길 5, 501호
(서초동 1716-7, 승보빌딩)
[별지 제43호서식]

공증인가
법무법인

도시 

(전화) 02-2183-0686
(팩스) 02-2183-0690

등부 2024년 제 2130호

Registered No. 2024-2130

인 증

NOTARIAL CERTIFICATE

위 사용자설명서 ----- 에
기재된 오스템임플란트 주식회사
대표이사 김해성 -----

Oh Eun Kyung -----

attorney-in-fact of
Kim Hae Sung/President of OSSTEM
IMPLANT Co., Ltd. -----


의 대리인 오 은 경 ----- 은
본 공증인의 앞에서 위 본인이 ----
서명날인한 사실을 인정했다.

appeared before me and admitted
said principal`s subscription to
the attached Instruction for Use. --

2024년 09월 03일
이 사무소에서 위 인증한다.

This is hereby attested on this
3rd day of Sep. 2024 at this office.

공증인가 도시
법무법인

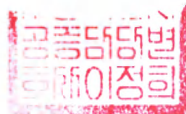

DOSI LAW FIRM

소 속 서울중앙지방검찰청

Belong to Seoul Central
District Prosecutor's Office

서울 서초구 서초대로49길 5, 501호
(서초동 1716-7, 승보빌딩)

Address of the office
#501, 5, Seocho-daero 49-gil,
Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea

이정희



공증담당변호사

이 정 희

Lee Jung Hee

Signature of the Notary Public

Lee Jung Hee

본 사무소는 인가번호 제2022-250호에 의거하여 2022년 04월 20일 법무부 장관으로부터 공증인 업무를 행할 것을 인가 받았다.

This office has been authorized by the
Minister of Justice, the Republic of
Korea, to act as Notary Public Since
20, Apr. 2022 Under Law No.2022-250.

210mm X 297mm
보존용지(1종) 70g/m²

/Фрагмент печати: ЛИ ЧЖУН ХИ * Государственный нотариус/

501, 5, Сочо-дэро 49-
гиль, Сочо-гу, Сеул,
Корея (1716-7 Сочо-дон,
здание Сынбо)
[Форма документа № 41]

Нотариальное
заверение

Юридическая фирма «Доси»

(Тел.): 02-2183-0686
(Факс): 02-2183-0690

Регистрационный номер 2024 – 2130

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ДОСИ» (DOSI LAW FIRM)

№ 501, 5, Сочо-дэро 49-гиль,
Сочо-гу, Сеул, Республика Корея
(#501, 5, Seocho-daero 49-gil,
Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea)

/Рельефный оттиск на самоклеящемся лейбле: Юридическая фирма «Доси»/

210 мм x 297 мм
Офисная бумага (1-й сорт) 70 г/м²

Инструкция по использованию

Кому: Росздравнадзор

Мы, компания «Осстем Имплант Ко., Лтд.» (Osstem Implant Co., Ltd.), настоящим заявляем, что данная Инструкция по использованию, предоставленная в Росздравнадзор, является полной, достоверной и подлинной.

*/Фрагмент печати: ЛИ ЧЖУН ХИ * Государственный нотариус/*

«Осстем Имплант Ко., Лтд.»

Должность: Президент

Имя: Ким Хэ Сун (Kim Hae Sung)

/Печать: «ОССТЕМ ИМПЛАНТ Ко., Лтд.»/

/Подпись/

/Штамп: «ОССТЕМ ИМПЛАНТ Ко., Лтд.»

А-дон, 51, Маю-ро 238 бон-гиль, Сихын-си,

Кёнги-до, 15079, Республика Корея

(A-dong, 51, Mayu-ro 238 beon-gil, Siheung-si,

Gyeonggi-do, 15079, Republic of Korea)

Президент Хэ Сун КИМ/

501, 5, Сочо-дэро 49-
гиль, Сочо-гу, Сеул,
Корея (1716-7 Сочо-дон,
здание Сынбо)
[Форма документа № 43]

Нотариальное
заверение

Юридическая фирма «Доси»

(Тел.): 02-2183-0686
(Факс): 02-2183-0690

Регистрационный № 2024 – 2130

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О Ын Кён (Oh Eun Kyung),
доверенное лицо

Кима Хэ Суна / Президента
Компании «ОССТЕМ ИМПЛАНТ Ко., Лтд.»

явился ко мне и признал указанную
подпись доверителя на прилагаемой
Инструкции по использованию.

Удостоверено сегодня, 3 сентября 2024 года в данном учреждении.

/Фрагмент печати: ЛИ ЧЖУН ХИ * Государственный нотариус/
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ДОСИ»

При **Центральной районной
прокуратуре города Сеула**
Адрес конторы
**№ 501, 5, Сочо-дэро 49-гиль,
Сочо-гу, Сеул, Республика Корея**

/Печать: ЛИ ЧЖУН ХИ * Государственный нотариус/

 /Подпись/
Подпись государственного нотариуса
Ли Чжун Хи (Lee Jung Hee)

Данное учреждение уполномочено Министром юстиции Республики Корея действовать в качестве
государственного нотариуса с 20 апреля 2022 года в соответствии с законом № 2022-250.

210 мм х 297 мм
Офисная бумага (1-й сорт) 70 г/м²

Перевод данного текста выполнен переводчиком Пахтуновым Алексеем Владимировичем.

Российская Федерация
Город Москва

Шестнадцатого октября две тысячи двадцать четвертого года

Я, Корсик Мария Александровна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Пахтунова Алексея Владимировича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2024- 46-1958

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

М. А. Корсик

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 37 лист(а)(ов)

Нотариус