

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会
中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

26. Паспорт
медицинского
изделия

02396127



中国国际贸易促进委员会 中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



244201A0/002365

号码 No.

兹证明：在所附文件上的武汉迈瑞科技有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. on the annexed DOCUMENT is genuine.



China Council for the Promotion of International Trade
(25)

授权签字:

Authorized
Signature: Luo Lidan

日期: 2024年10月08日
(Date: Oct. 08, 2024)

证明书验证网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>



2024-09-24

To whom it may concern,

Declaration

We, Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd., the manufacturer of the following medical devices:

Screws for osteosynthesis, non-sterile

hereby declare that,

1. the attached contents with the cover page of the < **OPERATING DOCUMENTATION. PASSPORT** of the medical device **Screws for osteosynthesis, non-sterile** > used for Russian medical device registration; this file introduces the basic information about the medical device, technical data and manufacturer's warranty.
2. the attached contents are used only for the medical device registration in Russia, and is required notarizing according to Russia n official regulations.

Very truly yours,

Mr. Guan
Deputy General Manager of the Company
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.



Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.
Add : No.38, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065, Hubei Province, P.R. China
Tel: +86-27-88309090
Fax: +86-27-88309082
Website: www.mindray.com

mindray

No.18, Qingfeng Road, Hongshan District, Wuhan City,
430063, Hubei Province, P.R. China
Tel. +86-27-88309090,
факс: +86-27-88309082
http://www.mindray.com

УТВЕРЖДАЮ / I certify

От имени «Ухань Майндрэй Саянэтифик Ко., Лтд.» /
On behalf of Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.

Заместитель Генерального директора Компании /
Deputy General Manager of the Company

 Г-н Чжан (Guan Zhiyong)
подпись / signature

дата / date 24 сентября 2024 года

**ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
ПАСПОРТ
медицинского изделия /**

**OPERATING DOCUMENTATION.
PASSPORT
of the medical devices**

***Винты
для остеосинтеза нестерильные***

Screws for osteosynthesis, non-sterile

производства компании / manufactured by the company
«Ухань Майндрэй Саянэтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.

Версия: 2/09-2024

2024

Документ компании «Ухань Майндрэй Саянэтифик Ко., Лтд.» / Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.
Все права защищены.

Настоящая эксплуатационная документация (Паспорт медицинского изделия) подготовлена для предоставления сведений в целях государственной регистрации и обращения медицинского изделия Винты для остеосинтеза нестерильные (далее по тексту – имплантаты, изделие, медицинское изделие) на территории Российской Федерации.

Сведения представлены в объеме, требуемом в соответствии с Правилами государственной регистрации медицинских изделий (Постановление Правительства от 27.12.2012 № 1416) и Приказа Минздрава России от 19.01.2017 № 11н.

Оглавление

1. Сведения о производителе, уполномоченном представителе и нотифицированном органе по сертификации продукции	4
1.1. Сведения о производителе и разработчике	4
1.2. Сведения об уполномоченном представителе в ЕС	4
1.3. Сведения об уполномоченном представителе в РФ	4
1.4. Нотифицированный орган по сертификации продукции	4
2. Общая информация о медицинском изделии	5
2.1. Наименование медицинского изделия	5
2.2. Стерильность	5
2.3. Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения	5
2.4. Информация о наличии в медицинском изделии канцерогенных, мутагенных или токсичных веществ	5
3. Описание и принцип действия медицинского изделия	5
4. Конструкция изделий	6
4.1. Общие сведения о конструкции изделий	6
4.2. Конструкция вариантов исполнения медицинского изделия	6
4.2.1. Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм	6
4.2.2. Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм	10
4.2.3. Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм	13
4.2.4. Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм	17
4.2.5. Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм	21
4.2.6. Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм	25
4.2.7. Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм	30
4.2.8. Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм	36
4.2.9. Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм	42
4.2.10. Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм	45
4.2.11. Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм	48
4.2.12. Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм	54
4.2.13. Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм	57
4.2.14. Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм	59
4.2.15. Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм	61
4.2.16. Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм	64
4.2.17. Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм	67
4.2.18. Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм	69
4.2.19. Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм	72
4.2.20. Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм	74
4.2.21. Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм	78
4.2.22. Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм	81
4.2.23. Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм	86
4.2.24. Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм	90
4.2.25. Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм	94
4.2.26. Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм	97
4.2.27. Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм	100
4.2.28. Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм	103
4.2.29. Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм	108

4.2.30. Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм.....	111
4.2.31. Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм.....	114
4.2.32. Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм.....	120
4.2.33. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм.....	124
4.2.34. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм.....	129
4.2.35. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм.....	135
4.2.36. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм.....	142
4.2.37. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм.....	152
4.2.38. Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм.....	160
4.2.39. Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм.....	165
4.2.40. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.....	170
4.2.41. Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм.....	176
4.2.42. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм....	180
4.2.43. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм....	187
4.2.44. Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм.....	194
4.2.45. Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм.....	198
4.2.46. Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм.....	200
4.2.47. Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм.....	202
4.2.48. Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм.....	204
5. Маркировка, упаковка, комплект поставки.....	206
5.1. Маркировка медицинского изделия.....	206
5.2. Упаковка медицинского изделия.....	207
5.3. Комплект поставки медицинского изделия.....	208
6. Техническое обслуживание и ремонт.....	208
7. Перечень применяемых стандартов.....	208
Приложение А. Наименование медицинского изделия.....	209
Приложение Б. Данные о механической прочности винтов.....	209

1. Сведения о производителе, уполномоченном представителе и нотифицированном органе по сертификации продукции

1.1. Сведения о производителе и разработчике

Производитель / разработчик	«Ухань Майндрэй Саинтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)
Адрес	No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City, 430065, Hubei Province, P.R. China
Адрес места производства	No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City, 430065, Hubei Province, P.R. China
Сайт / E-mail	www.mindray.com / service@mindray.com
Тел.:	+86-27-88309090
Факс:	+86-27-88309082

1.2. Сведения об уполномоченном представителе в ЕС

Представитель в ЕС	«Шанхай Интернешнл Холдинг Корп. ГмбХ (Европа)» (Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe))
Адрес	Айффештрассе 80, 20537 Гамбург, Германия (Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany)
Тел.:	0049-40-2513175
Факс:	0049-40-255726

1.3. Сведения об уполномоченном представителе в РФ

Уполномоченный представитель	Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус» (ООО «Миндрей Медикал Рус»)
Адрес	129110, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11А
Тел.:	+7 (499) 553-60-36
Факс:	+7 (499) 553-60-39
E-mail:	info.ru@mindray.com

1.4. Нотифицированный орган по сертификации продукции

Наименование нотифицированного органа	«ТЮВ Райнланд ЛГА Продактс ГмбХ», Тиллиштрассе 2, 90431, Нюрнберг, Германия (TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431, Nürnberg, Germany)
Номер нотифицированного органа	0197

2. Общая информация о медицинском изделии

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению медицинского изделия, в ней содержатся сведения о назначении, показаниях и противопоказаниях к применению, мерах предосторожности, порядок стерилизации медицинского изделия, сведения об условиях применения, транспортирования и хранения, а также другая важная информация.

По вопросам о медицинском изделии Вы можете обратиться к производителю или к его уполномоченному представителю по адресам и телефонам, которые указаны в разделе 1.

2.1. Наименование медицинского изделия

Винты для остеосинтеза нестерильные

Наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению), с указанием товарного знака и иных средств индивидуализации медицинского изделия в случае их нанесения на упаковку медицинского изделия, приведено в Приложении А.

2.2. Стерильность

Медицинское изделие поставляется нестерильным, но перед применением оно должно быть простерилизовано потребителем в соответствии с инструкциями, изложенными в настоящем документе.

2.3. Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения

Лекарственные средства для медицинского применения, материалы животного и (или) человеческого происхождения в медицинском изделии отсутствуют.

2.4. Информация о наличии в медицинском изделии канцерогенных, мутагенных или токсичных веществ

Канцерогенные, мутагенные и/или токсичные вещества в медицинском изделии отсутствуют.

3. Описание и принцип действия медицинского изделия

Медицинское изделие используется только в качестве вспомогательного средства для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента для фиксации костных пластин и шайб, соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома. Винты фиксируют костные отломки, а при использовании вместе с пластинами и шайбами для остеосинтеза создают единую жесткую конструкцию, которая удерживает отломки кости в репозированном положении до полного их сращения и обеспечивает временный перенос механических нагрузок на себя, тем самым, разгружая место перелома.

Варианты исполнения изделия отличаются друг от друга в основном формой, диаметром и длиной с тем, чтобы соответствовать клиническим потребностям пациентов с различными переломами. При этом все винты обладают аналогичными основными эксплуатационными характеристиками и имеют одинаковое назначение. Выбор изделий определенной формы и размера выполняется врачом в зависимости от характера перелома, локализации места перелома на участке определенной кости, свойств и размеров кости, состояния пациента.

Винты изготовлены из титанового сплава, который соответствует требованиям стандарта ISO 5832-3. Все изделия производятся с помощью холодной механической обработки, которая не ухудшает характеристики материалов. Материалы, используемые в производстве изделий, обрабатываются на токарных станках с цифровым управлением и с использованием другого современного производственного оборудования. Обработка и очистка поверхностей изделий проводятся в соответствии с действующими стандартами и с использованием проверенных методов.

Способ фиксации всех вариантов исполнения пластин и шайб при помощи винтов для остеосинтеза идентичен – винты для остеосинтеза устанавливаются в соответствующие отверстия в пластинах или шайбах. Размеры винтов с высокой точностью соответствуют отверстиям пластин и шайб, предусмотренным для совместного использования.

Поверхность винта, в зависимости от варианта исполнения, представляет собой внешнюю сферическую поверхность или внешнюю коническую поверхность. Соответственно, совпадающая поверхность пластины представляет собой внутреннюю сферическую поверхность или внутреннюю коническую поверхность.

Головка винта в зависимости от варианта исполнения имеет сферическую или коническую поверхность различных типов. Когда винт движется вниз, головка винта создает угловую экструзию, которая заставляет соединенные фрагменты перелома смещаться в противоположном направлении, создавая таким образом фиксированный эффект давления. Также предусмотрены исполнения винтов без головки.

4. Конструкция изделий

4.1. Общие сведения о конструкции изделий

Конструкция изделий выполнена с учётом их предусмотренного применения, включая возможные способы их установки и извлечения, воздействие на кость и примыкающие структуры, способы соединения между компонентами. Конструкция изделий обеспечивает необходимую механическую прочность, соответствие форм и размеров винтов формам и размерам отверстий пластин и шайб, а также отсутствие таких явлений, как заклинивание или ослабление изделия при соединении его с соответствующими инструментами.

В зависимости от варианта исполнения конструкция винтов соответствует типу HA (нижняя поверхность головки винта – сферическая, с укороченной зубчатой асимметричной резьбой) или типу HB (нижняя поверхность головки винта – сферическая, с глубокой зубчатой асимметричной резьбой) по ISO 5835:1991. Также винты могут иметь специальную модифицированную конструкцию, для крепления пластин с соответствующими отверстиями модифицированной конструкции.

Особенности конструкции изделий и основные характеристики, существенные для предусмотренного применения, сведения о совместимости пластин, шайб и винтов указаны далее.

Изделия изготавливаются с покрытием различных цветов. Покрытия не имеют красителя. Цвет достигается только за счет процесса гальванического окисления изделий. Цвет изделий определяется производителем с учётом текущих особенностей производства на момент изготовления партии изделий.

Доступные цвета:

- Серебристый (Серый);
- Коричневый;
- Небесно-голубой;
- Золотисто-желтый;
- Розово-красный;
- Голубой (Цвет морской волны);
- Травяной зелёный.

Различия в цветах имплантатов не влияют на их технические и функциональные характеристики.

4.2. Конструкция вариантов исполнения медицинского изделия

4.2.1. Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт компрессионный, без головки изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 3,0 мм;
- длина: 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

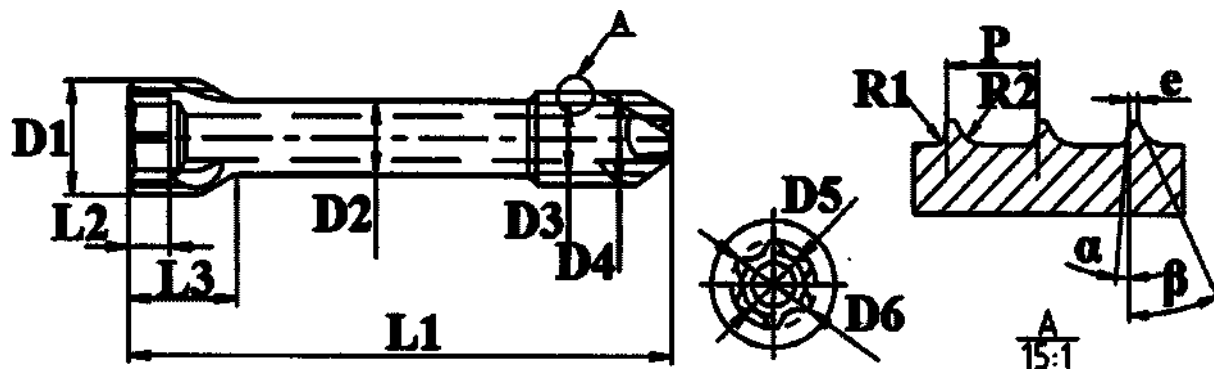


Таблица 4.2.1а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм
1.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,30	1,20 ^{+0,10} ₀
2.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,30	1,20 ^{+0,10} ₀
3.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,30	1,20 ^{+0,10} ₀
4.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,30	1,20 ^{+0,10} ₀
5.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,30	1,20 ^{+0,10} ₀
6.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,30	1,20 ^{+0,10} ₀
7.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,30	1,20 ^{+0,10} ₀
8.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,30	1,20 ^{+0,10} ₀
9.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,30	1,20 ^{+0,10} ₀
10.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	1,20 ^{+0,10} ₀
11.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	1,20 ^{+0,10} ₀
12.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	1,20 ^{+0,10} ₀
13.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	1,20 ^{+0,10} ₀
14.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	1,20 ^{+0,10} ₀

Таблица 4.2.1б – Характеристики изделия

№	Наименование	L3, мм	P, мм
1.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 14,0 мм	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
2.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 16,0 мм	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
3.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 18,0 мм	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
4.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 20,0 мм	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
5.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 22,0 мм	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
6.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 24,0 мм	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
7.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 26,0 мм	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
8.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 28,0 мм	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
9.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 30,0 мм	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
10.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 32,0 мм	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
11.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 34,0 мм	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
12.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 36,0 мм	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
13.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 38,0 мм	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20
14.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 40,0 мм	3,30 ± 0,10	1,20 ± 0,20

Таблица 4.2.1е – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм
1.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 14,0 мм	0,10	0,30
2.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 16,0 мм	0,10	0,30
3.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 18,0 мм	0,10	0,30
4.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 20,0 мм	0,10	0,30
5.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 22,0 мм	0,10	0,30
6.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 24,0 мм	0,10	0,30
7.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 26,0 мм	0,10	0,30
8.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 28,0 мм	0,10	0,30
9.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 30,0 мм	0,10	0,30
10.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 32,0 мм	0,10	0,30
11.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 34,0 мм	0,10	0,30
12.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 36,0 мм	0,10	0,30
13.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 38,0 мм	0,10	0,30
14.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 40,0 мм	0,10	0,30

Таблица 4.2.1ж – Характеристики изделия

№	Наименование	e, мм	α (°)
1.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 14,0 мм	0,10	5
2.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 16,0 мм	0,10	5
3.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 18,0 мм	0,10	5
4.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 20,0 мм	0,10	5
5.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 22,0 мм	0,10	5
6.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 24,0 мм	0,10	5
7.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 26,0 мм	0,10	5
8.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 28,0 мм	0,10	5
9.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 30,0 мм	0,10	5
10.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 32,0 мм	0,10	5
11.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 34,0 мм	0,10	5
12.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 36,0 мм	0,10	5
13.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 38,0 мм	0,10	5
14.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 40,0 мм	0,10	5

Таблица 4.2.1з – Характеристики изделия

№	Наименование	β (°)	Масса, г
1.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 14,0 мм	25	0,16 ± 0,05
2.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 16,0 мм	25	0,19 ± 0,05
3.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 18,0 мм	25	0,21 ± 0,05
4.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 20,0 мм	25	0,23 ± 0,05
5.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 22,0 мм	25	0,25 ± 0,05
6.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 24,0 мм	25	0,27 ± 0,05
7.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 26,0 мм	25	0,29 ± 0,05
8.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 28,0 мм	25	0,31 ± 0,10
9.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 30,0 мм	25	0,33 ± 0,10
10.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 32,0 мм	25	0,35 ± 0,10
11.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 34,0 мм	25	0,37 ± 0,10
12.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 36,0 мм	25	0,39 ± 0,10
13.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 38,0 мм	25	0,41 ± 0,10
14.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина 40,0 мм	25	0,43 ± 0,10

4.2.2. Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт компрессионный, без головки изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 4,5 мм;
- длина: 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0; 66,0; 68,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

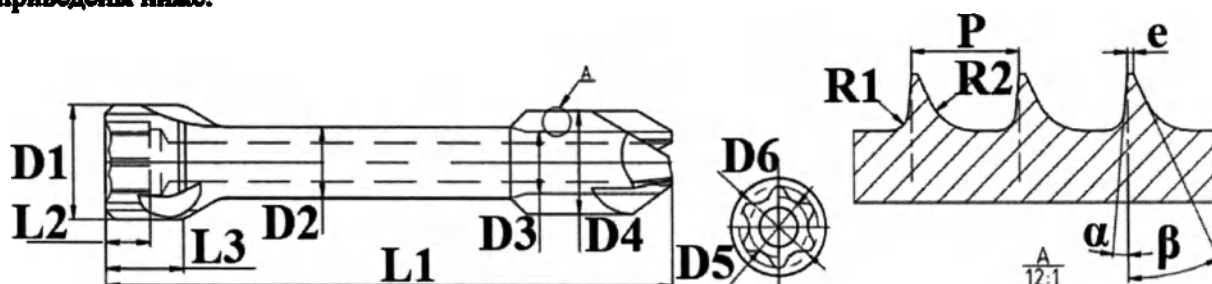


Таблица 4.2.2а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм
1.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10
2.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10
3.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10
4.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10
5.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10
6.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10
7.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10
8.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10
9.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10
10.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10
11.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10
12.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	52,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10
13.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	54,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10
14.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	56,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10
15.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	58,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10
16.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10
17.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	62,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10
18.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	64,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10
19.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	66,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10
20.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	68,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10

Таблица 4.2.2б – Характеристики изделия

№	Наименование	L3, мм	P, мм
1.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75
2.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75
3.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75
4.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75
5.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75
6.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75
7.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75
8.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75

Документ компании «Ухань Майндрой Саянзифик Ко., Лтд.» /

№	Наименование	L3, мм	P, мм
9.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75
10.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75
11.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75
12.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75
13.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75
14.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75
15.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75
16.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75
17.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75
18.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75
19.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75
20.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75

Таблица 4.2.2в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20
2.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20
3.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20
4.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20
5.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20
6.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20
7.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20
8.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20
9.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20
10.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20
11.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20
12.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20
13.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20
14.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20
15.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20
16.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20
17.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20
18.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20
19.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20
20.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	5,00 ± 0,20	3,20 ± 0,20

Таблица 4.2.2г – Характеристики изделия

№	Наименование	D3, мм	D4, мм
1.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
2.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
3.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
4.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
5.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
6.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
7.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
8.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
9.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
10.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
11.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
12.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
13.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
14.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20

№	Наименование	D3, мм	D4, мм
15.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
16.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
17.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
18.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
19.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20
20.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	3,10 ± 0,20	4,50 ± 0,20

Таблица 4.2.2д – Характеристики изделия

№	Наименование	D5, мм	D6, мм
1.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10
2.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10
3.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10
4.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10
5.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10
6.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10
7.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10
8.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10
9.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10
10.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10
11.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10
12.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10
13.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10
14.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10
15.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10
16.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10
17.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10
18.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10
19.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10
20.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	2,60 ± 0,10	3,50 ± 0,10

Таблица 4.2.2е – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	e, мм
1.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	0,30	0,80	0,10
2.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	0,30	0,80	0,10
3.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	0,30	0,80	0,10
4.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	0,30	0,80	0,10
5.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	0,30	0,80	0,10
6.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	0,30	0,80	0,10
7.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	0,30	0,80	0,10
8.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	0,30	0,80	0,10
9.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	0,30	0,80	0,10
10.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	0,30	0,80	0,10
11.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	0,30	0,80	0,10
12.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	0,30	0,80	0,10
13.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	0,30	0,80	0,10
14.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	0,30	0,80	0,10
15.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	0,30	0,80	0,10
16.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	0,30	0,80	0,10
17.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	0,30	0,80	0,10
18.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	0,30	0,80	0,10
19.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	0,30	0,80	0,10
20.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	0,30	0,80	0,10

Таблица 4.2.2ж – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	Масса, г
1.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	5	25	$0,71 \pm 0,20$
2.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	5	25	$0,77 \pm 0,20$
3.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	5	25	$0,83 \pm 0,20$
4.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	5	25	$0,90 \pm 0,20$
5.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	5	25	$0,96 \pm 0,20$
6.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	5	25	$1,02 \pm 0,50$
7.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	5	25	$1,09 \pm 0,50$
8.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	5	25	$1,15 \pm 0,50$
9.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	5	25	$1,21 \pm 0,50$
10.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	5	25	$1,28 \pm 0,50$
11.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	5	25	$1,34 \pm 0,50$
12.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	5	25	$1,40 \pm 0,50$
13.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	5	25	$1,47 \pm 0,50$
14.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	5	25	$1,53 \pm 0,50$
15.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	5	25	$1,59 \pm 0,50$
16.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	5	25	$1,66 \pm 0,50$
17.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	5	25	$1,72 \pm 0,50$
18.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	5	25	$1,78 \pm 0,50$
19.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	5	25	$1,85 \pm 0,50$
20.	Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	5	25	$1,91 \pm 0,50$

4.2.3. Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации шайб, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт канюлированный изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 3,5 мм;

- длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

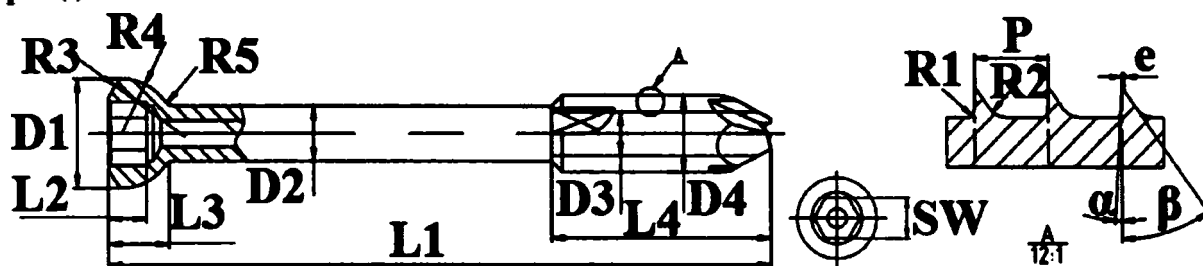


Таблица 4.2.3а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм
1.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	$10,00 \pm 0,30$	$1,80 \pm 0,10$
2.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	$12,00 \pm 0,30$	$1,80 \pm 0,10$
3.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	$14,00 \pm 0,30$	$1,80 \pm 0,10$
4.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	$16,00 \pm 0,30$	$1,80 \pm 0,10$
5.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,30$	$1,80 \pm 0,10$
6.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,30$	$1,80 \pm 0,10$
7.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	$22,00 \pm 0,30$	$1,80 \pm 0,10$
8.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	$24,00 \pm 0,30$	$1,80 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм
9.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10
10.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10
11.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10
12.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10
13.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10
14.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10
15.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10
16.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10
17.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10
18.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10
19.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10
20.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10
21.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10

Таблица 4.2.3б – Характеристики изделия

№	Наименование	L3, мм	L4, мм
1.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	2,80 ± 0,10	5,00 ± 0,20
2.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	2,80 ± 0,10	5,00 ± 0,20
3.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	2,80 ± 0,10	5,00 ± 0,20
4.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	2,80 ± 0,10	5,00 ± 0,20
5.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	2,80 ± 0,10	6,00 ± 0,20
6.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	2,80 ± 0,10	7,00 ± 0,20
7.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	2,80 ± 0,10	7,00 ± 0,20
8.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	2,80 ± 0,10	8,00 ± 0,20
9.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	2,80 ± 0,10	8,00 ± 0,20
10.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	2,80 ± 0,10	9,00 ± 0,20
11.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	2,80 ± 0,10	10,00 ± 0,20
12.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	2,80 ± 0,10	11,00 ± 0,20
13.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	2,80 ± 0,10	11,00 ± 0,20
14.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	2,80 ± 0,10	12,00 ± 0,20
15.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	2,80 ± 0,10	12,00 ± 0,20
16.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	2,80 ± 0,10	13,00 ± 0,20
17.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	2,80 ± 0,10	14,00 ± 0,20
18.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	2,80 ± 0,10	14,00 ± 0,20
19.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	2,80 ± 0,10	15,00 ± 0,20
20.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	2,80 ± 0,10	15,00 ± 0,20
21.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	2,80 ± 0,10	16,00 ± 0,20

Таблица 4.2.3в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20
2.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20
3.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20
4.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20
5.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20
6.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20
7.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20
8.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20
9.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20
10.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20
11.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20
12.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	4,95 ± 0,20	2,40 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
13.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	$4,95 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
14.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	$4,95 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
15.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	$4,95 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
16.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	$4,95 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
17.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	$4,95 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
18.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	$4,95 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
19.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	$4,95 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
20.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	$4,95 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
21.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	$4,95 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$

Таблица 4.2.3г – Характеристики изделия

№	Наименование	D3, мм	D4, мм
1.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$
2.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$
3.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$
4.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$
5.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$
6.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$
7.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$
8.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$
9.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$
10.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$
11.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$
12.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$
13.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$
14.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$
15.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$
16.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$
17.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$
18.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$
19.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$
20.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$
21.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$

Таблица 4.2.3д – Характеристики изделия

№	Наименование	SW, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,25	0,10
2.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,25	0,10
3.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,25	0,10
4.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,25	0,10
5.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,25	0,10
6.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,25	0,10
7.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,25	0,10
8.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,25	0,10
9.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,25	0,10
10.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,25	0,10
11.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,25	0,10
12.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,25	0,10
13.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,25	0,10
14.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,25	0,10
15.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,25	0,10
16.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,25	0,10

№	Наименование	SW, мм	P, мм	e, мм
17.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10
18.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10
19.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10
20.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10
21.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	2,50 ± 0,10	1,25	0,10

Таблица 4.2.3е – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	0,15	0,80	4,00
2.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	0,15	0,80	4,00
3.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	0,15	0,80	4,00
4.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	0,15	0,80	4,00
5.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	0,15	0,80	4,00
6.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	0,15	0,80	4,00
7.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	0,15	0,80	4,00
8.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	0,15	0,80	4,00
9.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	0,15	0,80	4,00
10.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	0,15	0,80	4,00
11.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	0,15	0,80	4,00
12.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	0,15	0,80	4,00
13.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	0,15	0,80	4,00
14.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	0,15	0,80	4,00
15.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	0,15	0,80	4,00
16.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	0,15	0,80	4,00
17.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	0,15	0,80	4,00
18.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	0,15	0,80	4,00
19.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	0,15	0,80	4,00
20.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	0,15	0,80	4,00
21.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	0,15	0,80	4,00

Таблица 4.2.3ж – Характеристики изделия

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	α (°)
1.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	2,50	0,50	3
2.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	2,50	0,50	3
3.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	2,50	0,50	3
4.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	2,50	0,50	3
5.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	2,50	0,50	3
6.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	2,50	0,50	3
7.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	2,50	0,50	3
8.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	2,50	0,50	3
9.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	2,50	0,50	3
10.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	2,50	0,50	3
11.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	2,50	0,50	3
12.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	2,50	0,50	3
13.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	2,50	0,50	3
14.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	2,50	0,50	3
15.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	2,50	0,50	3
16.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	2,50	0,50	3
17.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	2,50	0,50	3
18.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	2,50	0,50	3
19.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	2,50	0,50	3
20.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	2,50	0,50	3

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	α (°)
21.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	2,50	0,50	3

Таблица 4.2.3з – Характеристики изделия

№	Наименование	β (°)	Масса, г
1.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	35	$0,23 \pm 0,05$
2.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	35	$0,26 \pm 0,05$
3.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	35	$0,30 \pm 0,05$
4.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	35	$0,34 \pm 0,10$
5.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	35	$0,38 \pm 0,10$
6.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	35	$0,42 \pm 0,10$
7.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	35	$0,46 \pm 0,10$
8.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	35	$0,49 \pm 0,10$
9.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	35	$0,53 \pm 0,20$
10.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	35	$0,57 \pm 0,20$
11.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	35	$0,61 \pm 0,20$
12.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	35	$0,65 \pm 0,20$
13.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	35	$0,68 \pm 0,20$
14.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	35	$0,72 \pm 0,20$
15.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	35	$0,76 \pm 0,20$
16.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	35	$0,80 \pm 0,20$
17.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	35	$0,84 \pm 0,20$
18.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	35	$0,87 \pm 0,20$
19.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	35	$0,91 \pm 0,20$
20.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	35	$0,95 \pm 0,20$
21.	Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	35	$0,99 \pm 0,20$

4.2.4. Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации шайб, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт канюлированный изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 4,5 мм;
- длина: 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0; 66,0; 68,0; 70,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

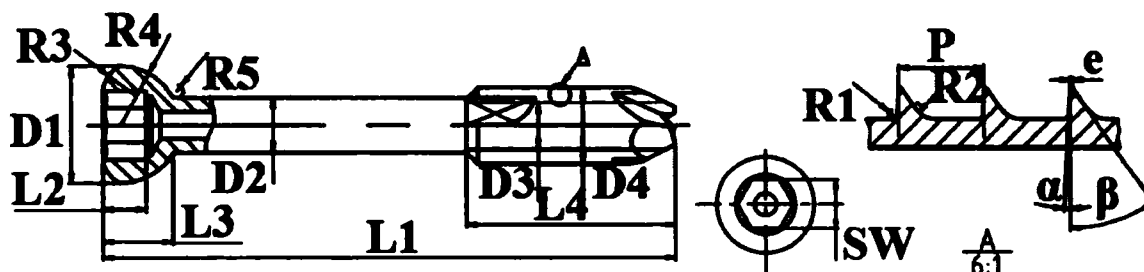


Таблица 4.2.4а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,10$	$4,20 \pm 0,10$
2.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	$22,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,10$	$4,20 \pm 0,10$
3.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	$24,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,10$	$4,20 \pm 0,10$
4.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	$26,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,10$	$4,20 \pm 0,10$
5.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	$28,00 \pm 0,30$	$2,60 \pm 0,10$	$4,20 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
6.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10
7.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10
8.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10
9.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10
10.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10
11.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10
12.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10
13.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10
14.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10
15.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10
16.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10
17.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	52,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10
18.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	54,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10
19.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	56,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10
20.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	58,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10
21.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10
22.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	62,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10
23.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	64,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10
24.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	66,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10
25.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	68,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10
26.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,60 ± 0,10	4,20 ± 0,10

Таблица 4.2.46 – Характеристики изделия

№	Наименование	L4, мм	SW, мм	P, мм
1.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	7,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
2.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	7,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
3.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	8,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
4.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	9,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
5.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	9,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
6.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	10,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
7.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	11,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
8.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	11,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
9.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	12,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
10.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	13,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
11.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	13,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
12.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	14,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
13.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	15,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
14.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	15,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
15.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	16,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
16.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	17,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
17.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	17,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
18.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	18,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
19.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	19,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
20.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	19,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
21.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	20,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
22.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	20,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
23.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	21,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
24.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	22,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
25.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	23,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75
26.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 70,0 мм	24,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10	1,75

Таблица 4.2.4в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
2.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
3.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
4.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
5.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
6.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
7.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
8.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
9.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
10.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
11.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
12.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
13.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
14.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
15.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
16.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
17.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
18.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
19.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
20.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
21.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
22.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
23.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
24.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
25.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20
26.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 70,0 мм	6,95 ± 0,20	3,20 ± 0,20	3,20 ± 0,20

Таблица 4.2.4г – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	e, мм	α (°)
1.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
2.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
3.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
4.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
5.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
6.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
7.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
8.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
9.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
10.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
11.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
12.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
13.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
14.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
15.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
16.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
17.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
18.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
19.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
20.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
21.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3

№	Наименование	D4, мм	e, мм	α (°)
22.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
23.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
24.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
25.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3
26.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 70,0 мм	4,50 ± 0,20	0,10	3

Таблица 4.2.4д – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	0,15	0,80	4,50
2.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	0,15	0,80	4,50
3.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	0,15	0,80	4,50
4.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	0,15	0,80	4,50
5.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	0,15	0,80	4,50
6.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	0,15	0,80	4,50
7.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	0,15	0,80	4,50
8.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	0,15	0,80	4,50
9.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	0,15	0,80	4,50
10.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	0,15	0,80	4,50
11.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	0,15	0,80	4,50
12.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	0,15	0,80	4,50
13.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	0,15	0,80	4,50
14.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	0,15	0,80	4,50
15.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	0,15	0,80	4,50
16.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	0,15	0,80	4,50
17.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	0,15	0,80	4,50
18.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	0,15	0,80	4,50
19.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	0,15	0,80	4,50
20.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	0,15	0,80	4,50
21.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	0,15	0,80	4,50
22.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	0,15	0,80	4,50
23.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	0,15	0,80	4,50
24.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	0,15	0,80	4,50
25.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	0,15	0,80	4,50
26.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 70,0 мм	0,15	0,80	4,50

Таблица 4.2.4е – Характеристики изделия

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	β (°)
1.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	3,50	0,50	35
2.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	3,50	0,50	35
3.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	3,50	0,50	35
4.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	3,50	0,50	35
5.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	3,50	0,50	35
6.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	3,50	0,50	35
7.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	3,50	0,50	35
8.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	3,50	0,50	35
9.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	3,50	0,50	35
10.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	3,50	0,50	35
11.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	3,50	0,50	35
12.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	3,50	0,50	35
13.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	3,50	0,50	35
14.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	3,50	0,50	35
15.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	3,50	0,50	35

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	β (°)
16.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	3,50	0,50	35
17.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	3,50	0,50	35
18.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	3,50	0,50	35
19.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	3,50	0,50	35
20.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	3,50	0,50	35
21.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	3,50	0,50	35
22.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	3,50	0,50	35
23.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	3,50	0,50	35
24.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	3,50	0,50	35
25.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	3,50	0,50	35
26.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 70,0 мм	3,50	0,50	35

Таблица 4.2.4ж – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	0,77 ± 0,20
2.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	0,83 ± 0,20
3.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	0,89 ± 0,20
4.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	0,96 ± 0,20
5.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	1,02 ± 0,50
6.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	1,08 ± 0,50
7.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	1,14 ± 0,50
8.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	1,20 ± 0,50
9.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	1,27 ± 0,50
10.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	1,33 ± 0,50
11.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	1,39 ± 0,50
12.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	1,45 ± 0,50
13.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	1,51 ± 0,50
14.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	1,58 ± 0,50
15.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	1,64 ± 0,50
16.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	1,70 ± 0,50
17.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	1,76 ± 0,50
18.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	1,82 ± 0,50
19.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	1,89 ± 0,50
20.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	1,95 ± 0,50
21.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	2,01 ± 0,50
22.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	2,07 ± 0,50
23.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	2,13 ± 0,50
24.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	2,20 ± 0,50
25.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	2,26 ± 0,50
26.	Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина 70,0 мм	2,32 ± 0,50

4.2.5. Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации шайб, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт канюлированный, с короткой резьбой изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 6,5 мм;
- длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

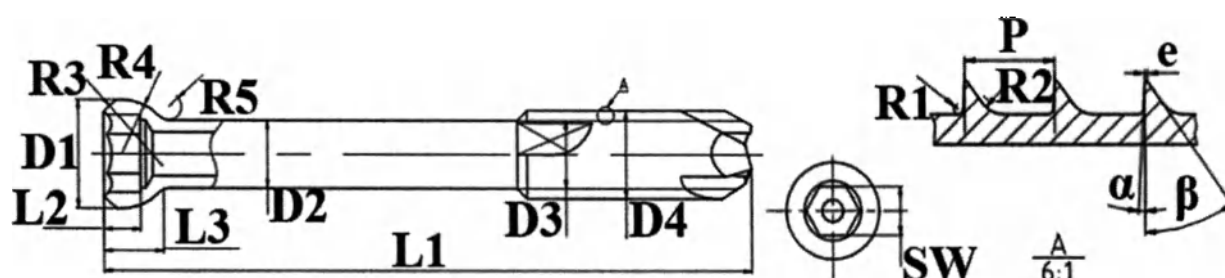


Таблица 4.2.5а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	45,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	65,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	75,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	105,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	110,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	115,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10

Таблица 4.2.5б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	$7,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	$7,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	$7,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	$7,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	$7,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	$7,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	$7,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	$7,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	$7,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	$7,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$

Таблица 4.2.5в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	R1, мм	R2, мм
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	0,15	0,80
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	0,15	0,80
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	0,15	0,80
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	0,15	0,80
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	0,15	0,80
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	0,15	0,80
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	0,15	0,80
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	0,15	0,80
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	0,15	0,80
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	0,15	0,80
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	0,15	0,80
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	0,15	0,80
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	0,15	0,80
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	0,15	0,80
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	0,15	0,80

Таблица 4.2.5г – Характеристики изделия

№	Наименование	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	6,00	4,00	1,00
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	6,00	4,00	1,00
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	6,00	4,00	1,00
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	6,00	4,00	1,00
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	6,00	4,00	1,00
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	6,00	4,00	1,00
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	6,00	4,00	1,00
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	6,00	4,00	1,00
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	6,00	4,00	1,00
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	6,00	4,00	1,00
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	6,00	4,00	1,00
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	6,00	4,00	1,00
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	6,00	4,00	1,00
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	6,00	4,00	1,00
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	6,00	4,00	1,00

Таблица 4.2.5д – Характеристики изделия

№	Наименование	SW, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10

№	Наименование	SW, мм	P, мм	e, мм
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	5,00 ± 0,10	2,75	0,10

Таблица 4.2.5e – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	Масса, г
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	3	35	2,49 ± 0,50
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	3	35	2,76 ± 0,50
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	3	35	3,02 ± 1,00
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	3	35	3,29 ± 1,00
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	3	35	3,56 ± 1,00
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	3	35	3,83 ± 1,00
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	3	35	4,10 ± 1,00
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	3	35	4,36 ± 1,00
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	3	35	4,63 ± 1,00
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	3	35	4,90 ± 1,00
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	3	35	5,17 ± 2,00
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	3	35	5,44 ± 2,00
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	3	35	5,70 ± 2,00
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	3	35	5,97 ± 2,00
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	3	35	6,24 ± 2,00

4.2.6. Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт канюлированный, с длинной резьбой изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 6,5 мм;

- длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

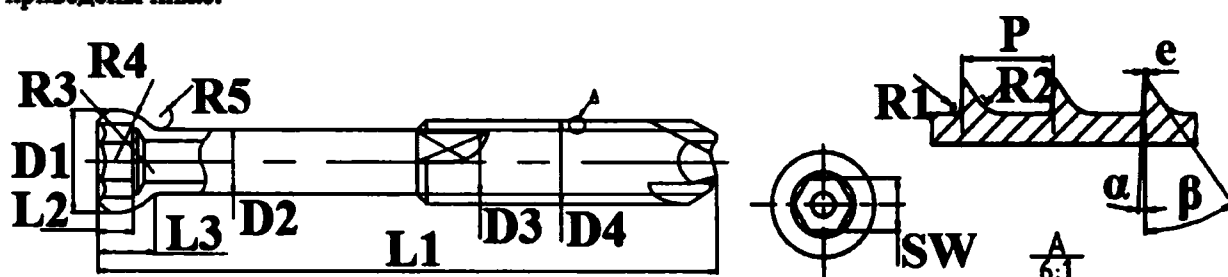


Таблица 4.2.6а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	45,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
5.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	65,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
6.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
7.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	75,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
8.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
9.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
10.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
11.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
12.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
13.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	105,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
14.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	110,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10
15.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	115,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,50 ± 0,10

Таблица 4.2.6б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
5	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
6	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
7	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
8	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
9	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
10	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
11	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
12	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
13	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
14	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
15	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	7,95 ± 0,20	5,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20

Таблица 4.2.6в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	SW, мм	P, мм
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	6,50 ± 0,20	5,00 ± 0,10	2,75
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	6,50 ± 0,20	5,00 ± 0,10	2,75
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	6,50 ± 0,20	5,00 ± 0,10	2,75
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	6,50 ± 0,20	5,00 ± 0,10	2,75
5	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	6,50 ± 0,20	5,00 ± 0,10	2,75
6	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	6,50 ± 0,20	5,00 ± 0,10	2,75
7	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	6,50 ± 0,20	5,00 ± 0,10	2,75
8	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	6,50 ± 0,20	5,00 ± 0,10	2,75
9	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	6,50 ± 0,20	5,00 ± 0,10	2,75
10	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	6,50 ± 0,20	5,00 ± 0,10	2,75
11	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	6,50 ± 0,20	5,00 ± 0,10	2,75
12	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	6,50 ± 0,20	5,00 ± 0,10	2,75
13	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	6,50 ± 0,20	5,00 ± 0,10	2,75

№	Наименование	D4, мм	SW, мм	P, мм
14	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	6,50 ± 0,20	5,00 ± 0,10	2,75
15	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	6,50 ± 0,20	5,00 ± 0,10	2,75

Таблица 4.2.6г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	0,15	0,80	6,00
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	0,15	0,80	6,00
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	0,15	0,80	6,00
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	0,15	0,80	6,00
5	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	0,15	0,80	6,00
6	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	0,15	0,80	6,00
7	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	0,15	0,80	6,00
8	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	0,15	0,80	6,00
9	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	0,15	0,80	6,00
10	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	0,15	0,80	6,00
11	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	0,15	0,80	6,00
12	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	0,15	0,80	6,00
13	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	0,15	0,80	6,00
14	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	0,15	0,80	6,00
15	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	0,15	0,80	6,00

Таблица 4.2.6д – Характеристики изделия

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	e, мм
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	4,00	1,00	0,10
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	4,00	1,00	0,10
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	4,00	1,00	0,10
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	4,00	1,00	0,10
5	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	4,00	1,00	0,10
6	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	4,00	1,00	0,10

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	e, мм
7	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	4,00	1,00	0,10
8	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	4,00	1,00	0,10
9	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	4,00	1,00	0,10
10	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	4,00	1,00	0,10
11	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	4,00	1,00	0,10
12	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	4,00	1,00	0,10
13	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	4,00	1,00	0,10
14	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	4,00	1,00	0,10
15	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	4,00	1,00	0,10

Таблица 4.2.6е – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	Масса, г
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	3	35	2,70 ± 0,50
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	3	35	2,96 ± 0,50
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	3	35	3,23 ± 1,00
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	3	35	3,49 ± 1,00
5	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	3	35	3,75 ± 1,00
6	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	3	35	4,01 ± 1,00
7	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	3	35	4,28 ± 1,00
8	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	3	35	4,54 ± 1,00
9	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	3	35	4,80 ± 1,00
10	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	3	35	5,07 ± 2,00
11	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	3	35	5,33 ± 2,00
12	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	3	35	5,59 ± 2,00
13	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	3	35	5,85 ± 2,00
14	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	3	35	6,12 ± 2,00
15	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	3	35	6,38 ± 2,00

4.2.7. Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации шайб, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт канюлированный, с короткой резьбой изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 7,5 мм;
- длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

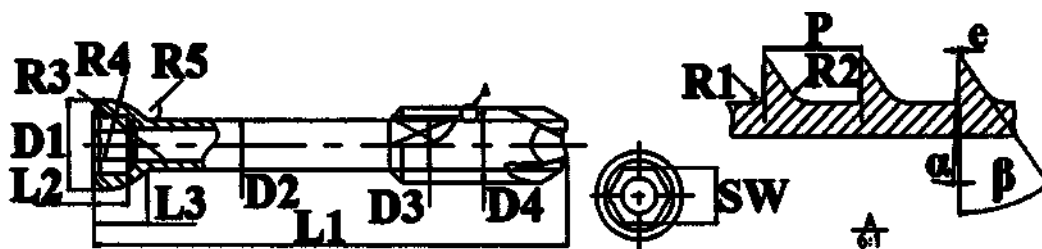


Таблица 4.2.7а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	45,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	65,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	75,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	105,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	110,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	115,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10
16.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	120,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10

Таблица 4.2.76 – Характеристики изделия

№	Наименование	L3, мм	SW, мм
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	$5,50 \pm 0,10$	$5,00 \pm 0,10$
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	$5,50 \pm 0,10$	$5,00 \pm 0,10$
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	$5,50 \pm 0,10$	$5,00 \pm 0,10$
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	$5,50 \pm 0,10$	$5,00 \pm 0,10$
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	$5,50 \pm 0,10$	$5,00 \pm 0,10$
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	$5,50 \pm 0,10$	$5,00 \pm 0,10$
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	$5,50 \pm 0,10$	$5,00 \pm 0,10$
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	$5,50 \pm 0,10$	$5,00 \pm 0,10$
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	$5,50 \pm 0,10$	$5,00 \pm 0,10$
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	$5,50 \pm 0,10$	$5,00 \pm 0,10$
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	$5,50 \pm 0,10$	$5,00 \pm 0,10$
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	$5,50 \pm 0,10$	$5,00 \pm 0,10$
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	$5,50 \pm 0,10$	$5,00 \pm 0,10$
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	$5,50 \pm 0,10$	$5,00 \pm 0,10$
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	$5,50 \pm 0,10$	$5,00 \pm 0,10$
16.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	$5,50 \pm 0,10$	$5,00 \pm 0,10$

Таблица 4.2.7в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
16.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$

Таблица 4.2.7г – Характеристики изделия

№	Наименование	D3, мм	D4, мм
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$
16.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$

Таблица 4.2.7д – Характеристики изделия

№	Наименование	P, мм	e, мм
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	2,75	0,10
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	2,75	0,10
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	2,75	0,10
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	2,75	0,10
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	2,75	0,10
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	2,75	0,10
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	2,75	0,10
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	2,75	0,10
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	2,75	0,10
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	2,75	0,10
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	2,75	0,10
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	2,75	0,10
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	2,75	0,10
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	2,75	0,10
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	2,75	0,10
16.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	2,75	0,10

Таблица 4.2.7е – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	0,15	0,80
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	0,15	0,80
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	0,15	0,80
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	0,15	0,80
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	0,15	0,80
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	0,15	0,80
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	0,15	0,80
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	0,15	0,80

№	Наименование	R1, мм	R2, мм
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	0,15	0,80
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	0,15	0,80
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	0,15	0,80
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	0,15	0,80
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	0,15	0,80
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	0,15	0,80
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	0,15	0,80
16.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	0,15	0,80

Таблица 4.2.7ж – Характеристики изделия

№	Наименование	R3, мм	R4, мм
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	8,50	6,00
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	8,50	6,00
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	8,50	6,00
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	8,50	6,00
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	8,50	6,00
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	8,50	6,00
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	8,50	6,00
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	8,50	6,00
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	8,50	6,00
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	8,50	6,00
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	8,50	6,00
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	8,50	6,00
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	8,50	6,00
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	8,50	6,00
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	8,50	6,00
16.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	8,50	6,00

Таблица 4.2.7з – Характеристики изделия

№	Наименование	R5, мм	α (°)
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	1,00	3
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	1,00	3
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	1,00	3
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	1,00	3
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	1,00	3
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	1,00	3
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	1,00	3
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	1,00	3
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	1,00	3
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	1,00	3
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	1,00	3
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	1,00	3
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	1,00	3
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	1,00	3
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	1,00	3
16.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	1,00	3

Таблица 4.2.7и – Характеристики изделия

№	Наименование	β (°)	Масса, г
1.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	35	4,35 ± 1,00
2.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	35	4,51 ± 1,00
3.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	35	4,67 ± 1,00
4.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	35	4,83 ± 1,00
5.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	35	4,99 ± 1,00
6.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	35	5,15 ± 2,00
7.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	35	5,31 ± 2,00
8.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	35	5,47 ± 2,00

№	Наименование	β (°)	Масса, г
9.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	35	$5,63 \pm 2,00$
10.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	35	$5,79 \pm 2,00$
11.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	35	$5,95 \pm 2,00$
12.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	35	$6,11 \pm 2,00$
13.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	35	$6,27 \pm 2,00$
14.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	35	$6,43 \pm 2,00$
15.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	35	$6,59 \pm 2,00$
16.	Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	35	$6,75 \pm 2,00$

4.2.8. Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт канюлированный, с длинной резьбой изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 7,5 мм;
- длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

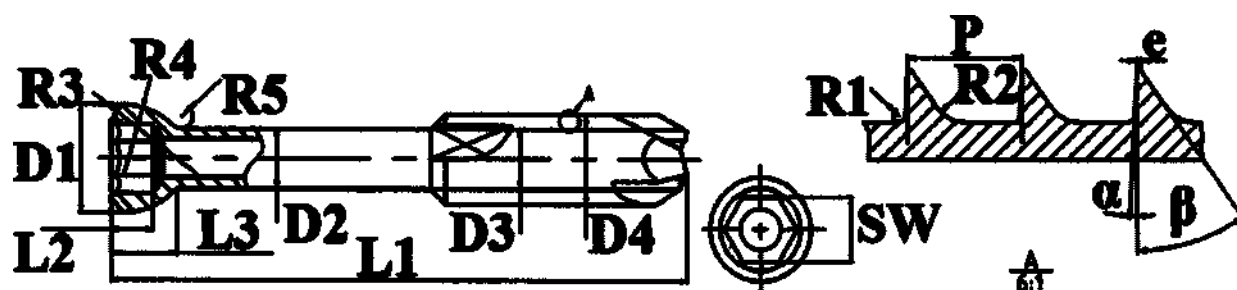


Таблица 4.2.8а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	$45,00 \pm 0,30$	$3,50 \pm 0,10$
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	$50,00 \pm 0,30$	$3,50 \pm 0,10$
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	$55,00 \pm 0,30$	$3,50 \pm 0,10$
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	$60,00 \pm 0,30$	$3,50 \pm 0,10$
5.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	$65,00 \pm 0,30$	$3,50 \pm 0,10$
6.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	$70,00 \pm 0,30$	$3,50 \pm 0,10$
7.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	$75,00 \pm 0,30$	$3,50 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм
8	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10
9	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10
10	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10
11	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10
12	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10
13	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	105,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10
14	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	110,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10
15	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	115,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10
16	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	120,00 ± 0,30	3,50 ± 0,10

Таблица 4.2.86 – Характеристики изделия

№	Наименование	L3, мм	SW, мм
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	5,50 ± 0,10	5,00 ± 0,10
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	5,50 ± 0,10	5,00 ± 0,10
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	5,50 ± 0,10	5,00 ± 0,10
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	5,50 ± 0,10	5,00 ± 0,10
5	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	5,50 ± 0,10	5,00 ± 0,10
6	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	5,50 ± 0,10	5,00 ± 0,10
7	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	5,50 ± 0,10	5,00 ± 0,10
8	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	5,50 ± 0,10	5,00 ± 0,10
9	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	5,50 ± 0,10	5,00 ± 0,10
10	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	5,50 ± 0,10	5,00 ± 0,10
11	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	5,50 ± 0,10	5,00 ± 0,10
12	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	5,50 ± 0,10	5,00 ± 0,10
13	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	5,50 ± 0,10	5,00 ± 0,10
14	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	5,50 ± 0,10	5,00 ± 0,10
15	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	5,50 ± 0,10	5,00 ± 0,10
16.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	5,50 ± 0,10	5,00 ± 0,10

Таблица 4.2.8в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
5	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
6	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
7	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
8	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
9	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
10	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
11	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
12	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
13	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
14	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
15	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$
16.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	$8,95 \pm 0,20$	$5,00 \pm 0,20$

Таблица 4.2.8г – Характеристики изделия

№	Наименование	D3, мм	D4, мм
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$
5	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$
6	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$
7	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$
8	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$7,50 \pm 0,20$

№	Наименование	D3, мм	D4, мм
9	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20
10	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20
11	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20
12	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20
13	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20
14	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20
15	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20
16	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	5,00 ± 0,20	7,50 ± 0,20

Таблица 4.2.8д – Характеристики изделия

№	Наименование	P, мм	e, мм
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	2,75	0,10
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	2,75	0,10
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	2,75	0,10
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	2,75	0,10
5	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	2,75	0,10
6	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	2,75	0,10
7	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	2,75	0,10
8	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	2,75	0,10
9	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	2,75	0,10
10	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	2,75	0,10
11	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	2,75	0,10
12	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	2,75	0,10
13	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	2,75	0,10
14	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	2,75	0,10
15	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	2,75	0,10
16.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	2,75	0,10

Таблица 4.2.8е – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	0,15	0,80
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	0,15	0,80
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	0,15	0,80
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	0,15	0,80
5.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	0,15	0,80
6.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	0,15	0,80
7.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	0,15	0,80
8.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	0,15	0,80
9.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	0,15	0,80
10.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	0,15	0,80
11.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	0,15	0,80
12.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	0,15	0,80
13.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	0,15	0,80
14.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	0,15	0,80
15.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	0,15	0,80
16.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	0,15	0,80

Таблица 4.2.8ж – Характеристики изделия

№	Наименование	R3, мм	R4, мм
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	8,50	6,00
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	8,50	6,00
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	8,50	6,00
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	8,50	6,00
5.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	8,50	6,00
6.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	8,50	6,00
7.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	8,50	6,00
8.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	8,50	6,00

№	Наименование	R3, мм	R4, мм
9.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	8,50	6,00
10.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	8,50	6,00
11.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	8,50	6,00
12.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	8,50	6,00
13.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	8,50	6,00
14.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	8,50	6,00
15.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	8,50	6,00
16.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	8,50	6,00

Таблица 4.2.8з – Характеристики изделия

№	Наименование	R5, мм	α (°)
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	1,00	3
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	1,00	3
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	1,00	3
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	1,00	3
5.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	1,00	3
6.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	1,00	3
7.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	1,00	3
8.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	1,00	3
9.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	1,00	3
10.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	1,00	3
11.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	1,00	3
12.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	1,00	3
13.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	1,00	3
14.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	1,00	3
15.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	1,00	3
16.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	1,00	3

Таблица 4.2.8и – Характеристики изделия

№	Наименование	β (°)	Масса, г
1.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 45,0 мм	35	$4,63 \pm 1,00$
2.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 50,0 мм	35	$4,75 \pm 1,00$
3.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 55,0 мм	35	$4,95 \pm 1,00$
4.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 60,0 мм	35	$5,11 \pm 2,00$
5	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 65,0 мм	35	$5,27 \pm 2,00$
6	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 70,0 мм	35	$5,43 \pm 2,00$
7	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 75,0 мм	35	$5,59 \pm 2,00$
8	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 80,0 мм	35	$5,75 \pm 2,00$
9	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 85,0 мм	35	$5,91 \pm 2,00$
10	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 90,0 мм	35	$6,07 \pm 2,00$
11	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 95,0 мм	35	$6,23 \pm 2,00$
12	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 100,0 мм	35	$6,39 \pm 2,00$
13	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 105,0 мм	35	$6,55 \pm 2,00$
14	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 110,0 мм	35	$6,71 \pm 2,00$
15	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 115,0 мм	35	$6,87 \pm 2,00$
16.	Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина 120,0 мм	35	$7,03 \pm 2,00$

4.2.9. Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт блокирующий изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 2,7 мм;
- длина: 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 40,0; 35,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

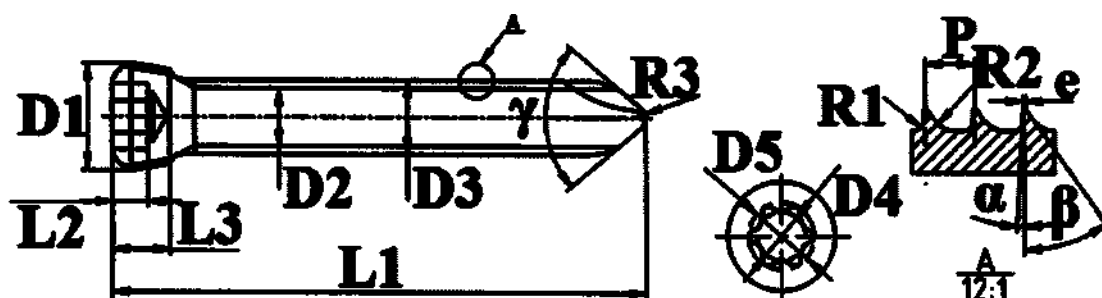


Таблица 4.2.9а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	8,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	2,10 ± 0,10
2.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	2,10 ± 0,10
3.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	2,10 ± 0,10
4.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	2,10 ± 0,10
5.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	2,10 ± 0,10
6.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	2,10 ± 0,10
7.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	2,10 ± 0,10
8.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	2,10 ± 0,10
9.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	2,10 ± 0,10
10.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	2,10 ± 0,10
11.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	2,10 ± 0,10
12.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	2,10 ± 0,10
13.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 35,0 мм	35,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	2,10 ± 0,10
14.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	2,10 ± 0,10
15.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 45,0 мм	45,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	2,10 ± 0,10
16.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	2,10 ± 0,10
17.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	2,10 ± 0,10
18.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	2,10 ± 0,10

Таблица 4.2.9б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
2.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
3.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
4.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
5.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
6.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
7.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
8.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
9.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
10.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
11.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
12.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
13.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 35,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
14.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
15.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 45,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
16.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
17.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
18.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	3,95 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20

Таблица 4.2.9в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
2.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
3.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
4.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
5.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
6.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
7.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
8.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
9.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
10.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
11.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
12.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
13.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 35,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
14.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
15.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 45,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
16.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
17.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60
18.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	1,75 ± 0,10	2,40 ± 0,10	0,60

Таблица 4.2.9г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	0,10	0,30	0,50
2.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	0,10	0,30	0,50
3.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	0,10	0,30	0,50
4.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	0,10	0,30	0,50
5.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	0,10	0,30	0,50
6.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	0,10	0,30	0,50
7.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	0,10	0,30	0,50
8.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	0,10	0,30	0,50
9.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	0,10	0,30	0,50
10.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	0,10	0,30	0,50
11.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	0,10	0,30	0,50
12.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	0,10	0,30	0,50
13.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 35,0 мм	0,10	0,30	0,50
14.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	0,10	0,30	0,50
15.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 45,0 мм	0,10	0,30	0,50
16.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	0,10	0,30	0,50
17.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	0,10	0,30	0,50
18.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	0,10	0,30	0,50

Таблица 4.2.9д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)
1.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	10	35	90
2.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	10	35	90
3.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	10	35	90
4.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	10	35	90
5.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	10	35	90
6.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	10	35	90
7.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	10	35	90
8.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	10	35	90
9.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	10	35	90
10.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	10	35	90
11.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	10	35	90
12.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	10	35	90
13.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	10	35	90
14.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 35,0 мм	10	35	90
15.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 45,0 мм	10	35	90
16.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	10	35	90
17.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	10	35	90

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)
18.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	10	35	90

Таблица 4.2.9е – Характеристики изделия

№	Наименование	e, мм	Масса, г
1.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	0,04	0,14 ± 0,05
2.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	0,04	0,18 ± 0,05
3.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	0,04	0,22 ± 0,05
4.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	0,04	0,26 ± 0,05
5.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	0,04	0,30 ± 0,05
6.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	0,04	0,34 ± 0,10
7.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	0,04	0,37 ± 0,10
8.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	0,04	0,41 ± 0,10
9.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	0,04	0,45 ± 0,10
10.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	0,04	0,49 ± 0,10
11.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	0,04	0,53 ± 0,20
12.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	0,04	0,56 ± 0,20
13.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	0,04	0,76 ± 0,20
14.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 35,0 мм	0,04	0,66 ± 0,20
15.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 45,0 мм	0,04	0,86 ± 0,20
16.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	0,04	0,95 ± 0,20
17.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	0,04	1,05 ± 0,50
18.	Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	0,04	1,15 ± 0,50

4.2.10. Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт блокирующий изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 3,5 мм;
- длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

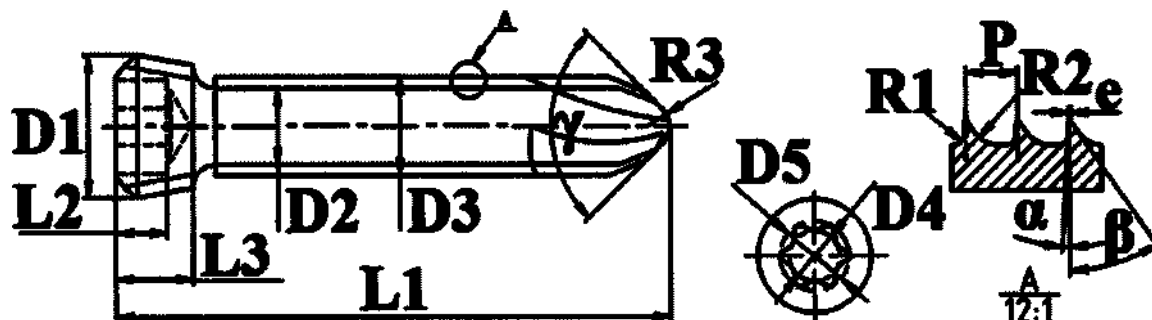


Таблица 4.2.10а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
2.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
3.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
4.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
5.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
6.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
7.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
8.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
9.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
10.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
11.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
12.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
13.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
14.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
15.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
16.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
17.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
18.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
19.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
20.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10
21.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	1,80 ± 0,10	2,77 ± 0,10

Таблица 4.2.10б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20
2.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20
3.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20
4.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20
5.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20
6.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20
7.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20
8.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20
9.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20
10.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20
11.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20
12.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20
13.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20
14.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20
15.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20
16.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20
17.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20
18.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20
19.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20
20.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20
21.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	3,50 ± 0,20

Таблица 4.2.10в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	R1, мм
1.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10	0,20
2.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10	0,20
3.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10	0,20
4.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10	0,20
5.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10	0,20
6.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10	0,20
7.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10	0,20
8.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10	0,20
9.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10	0,20
10.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10	0,20

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	R1, мм
11.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10	0,20
12.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10	0,20
13.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10	0,20
14.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10	0,20
15.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10	0,20
16.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10	0,20
17.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10	0,20
18.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10	0,20
19.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10	0,20
20.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10	0,20
21.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	2,50 ± 0,10	3,30 ± 0,10	0,20

Таблица 4.2.10г – Характеристики изделия

№	Наименование	R2, мм	R3, мм	P, мм
1.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	0,40	0,80	0,80
2.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	0,40	0,80	0,80
3.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	0,40	0,80	0,80
4.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	0,40	0,80	0,80
5.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	0,40	0,80	0,80
6.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	0,40	0,80	0,80
7.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	0,40	0,80	0,80
8.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	0,40	0,80	0,80
9.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	0,40	0,80	0,80
10.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	0,40	0,80	0,80
11.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	0,40	0,80	0,80
12.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	0,40	0,80	0,80
13.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	0,40	0,80	0,80
14.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	0,40	0,80	0,80
15.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	0,40	0,80	0,80
16.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	0,40	0,80	0,80
17.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	0,40	0,80	0,80
18.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	0,40	0,80	0,80
19.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	0,40	0,80	0,80
20.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	0,40	0,80	0,80
21.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	0,40	0,80	0,80

Таблица 4.2.10д – Характеристики изделия

№	Наименование	e, мм	α (°)	β (°)
1.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	0,07	3	35
2.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	0,07	3	35
3.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	0,07	3	35
4.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	0,07	3	35
5.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	0,07	3	35
6.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	0,07	3	35
7.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	0,07	3	35
8.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	0,07	3	35
9.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	0,07	3	35
10.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	0,07	3	35
11.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	0,07	3	35
12.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	0,07	3	35
13.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	0,07	3	35
14.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	0,07	3	35

№	Наименование	e, мм	α (°)	β (°)
15.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	0,07	3	35
16.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	0,07	3	35
17.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	0,07	3	35
18.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	0,07	3	35
19.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	0,07	3	35
20.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	0,07	3	35
21.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	0,07	3	35

Таблица 4.2.10е – Характеристики изделия

№	Наименование	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	90	$0,27 \pm 0,05$
2.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	90	$0,33 \pm 0,10$
3.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	90	$0,38 \pm 0,10$
4.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	90	$0,44 \pm 0,10$
5.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	90	$0,50 \pm 0,20$
6.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	90	$0,56 \pm 0,20$
7.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	90	$0,61 \pm 0,20$
8.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	90	$0,67 \pm 0,20$
9.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	90	$0,73 \pm 0,20$
10.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	90	$0,78 \pm 0,20$
11.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	90	$0,84 \pm 0,20$
12.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	90	$0,90 \pm 0,20$
13.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	90	$0,95 \pm 0,20$
14.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	90	$1,01 \pm 0,50$
15.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	90	$1,07 \pm 0,50$
16.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	90	$1,13 \pm 0,50$
17.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	90	$1,18 \pm 0,50$
18.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	90	$1,24 \pm 0,50$
19.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	90	$1,30 \pm 0,50$
20.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	90	$1,35 \pm 0,50$
21.	Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	90	$1,41 \pm 0,50$

4.2.11. Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт блокирующий изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 5,0 мм;
- длина: 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0; 66,0; 68,0; 70,0; 72,0; 74,0; 76,0; 78,0; 80,0; 82,0; 84,0; 86,0; 88,0; 90,0; 92,0; 94,0; 96,0; 98,0; 100,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

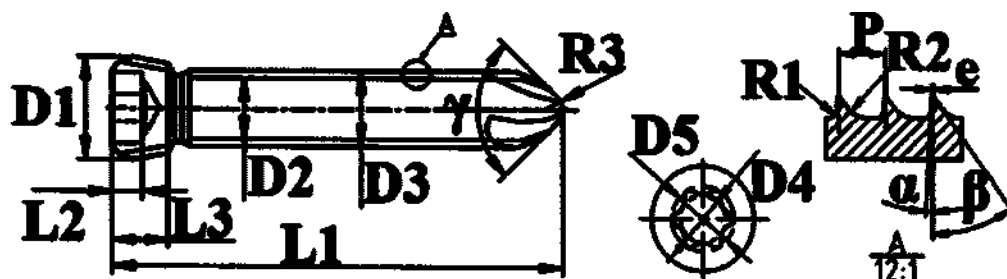


Таблица 4.2.11а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
2.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
3.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
4.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
5.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
6.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
7.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
8.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
9.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
10.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
11.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
12.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
13.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
14.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
15.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
16.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
17.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
18.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 52,0 мм	52,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
19.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 54,0 мм	54,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
20.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 56,0 мм	56,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
21.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 58,0 мм	58,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
22.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
23.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 62,0 мм	62,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
24.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 64,0 мм	64,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
25.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 66,0 мм	66,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
26.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 68,0 мм	68,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
27.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
28.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 72,0 мм	72,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
29.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 74,0 мм	74,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
30.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 76,0 мм	76,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
31.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 78,0 мм	78,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
32.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
33.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 82,0 мм	82,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
34.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 84,0 мм	84,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
35.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 86,0 мм	86,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
36.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 88,0 мм	88,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
37.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
38.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 92,0 мм	92,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
39.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 94,0 мм	94,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
40.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 96,0 мм	96,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
41.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 98,0 мм	98,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10
42.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	2,00 ± 0,10	3,77 ± 0,10

Таблица 4.2.11б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 18,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
2.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 20,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
3.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 22,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
4.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 24,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
5.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 26,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
6.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 28,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
7.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 30,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
8.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 32,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
9.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 34,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
10.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 36,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
11.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 38,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
12.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 40,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
13.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 42,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
14.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 44,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
15.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 46,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
16.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 48,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
17.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 50,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
18.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 52,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
19.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 54,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
20.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 56,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
21.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 58,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
22.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 60,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
23.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 62,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
24.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 64,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
25.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 66,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
26.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 68,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
27.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 70,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
28.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 72,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
29.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 74,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
30.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 76,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
31.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 78,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
32.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 80,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
33.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 82,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
34.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 84,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
35.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 86,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
36.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 88,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
37.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 90,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
38.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 92,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
39.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 94,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
40.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 96,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
41.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 98,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20
42.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 100,0 мм	6,79 ± 0,20	4,00 ± 0,20	5,00 ± 0,20

Таблица 4.2.11в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм
1.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 18,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
2.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 20,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
3.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 22,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
4.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 24,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
5.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 26,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
6.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 28,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
7.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 30,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
8.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 32,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
9.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 34,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
10.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 36,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
11.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 38,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
12.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 40,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
13.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 42,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10

№	Наименование	D4, мм	D5, мм
14.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 44,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
15.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 46,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
16.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 48,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
17.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 50,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
18.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 52,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
19.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 54,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
20.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 56,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
21.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 58,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
22.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 60,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
23.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 62,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
24.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 64,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
25.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 66,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
26.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 68,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
27.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 70,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
28.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 72,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
29.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 74,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
30.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 76,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
31.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 78,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
32.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 80,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
33.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 82,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
34.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 84,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
35.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 86,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
36.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 88,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
37.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 90,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
38.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 92,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
39.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 94,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
40.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 96,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
41.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 98,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10
42.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 100,0 мм	3,50 ± 0,10	4,60 ± 0,10

Таблица 4.2.11г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 18,0 мм	0,20	0,50	1,20
2.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 20,0 мм	0,20	0,50	1,20
3.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 22,0 мм	0,20	0,50	1,20
4.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 24,0 мм	0,20	0,50	1,20
5.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 26,0 мм	0,20	0,50	1,20
6.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 28,0 мм	0,20	0,50	1,20
7.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 30,0 мм	0,20	0,50	1,20
8.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 32,0 мм	0,20	0,50	1,20
9.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 34,0 мм	0,20	0,50	1,20
10.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 36,0 мм	0,20	0,50	1,20
11.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 38,0 мм	0,20	0,50	1,20
12.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 40,0 мм	0,20	0,50	1,20
13.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 42,0 мм	0,20	0,50	1,20
14.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 44,0 мм	0,20	0,50	1,20
15.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 46,0 мм	0,20	0,50	1,20
16.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 48,0 мм	0,20	0,50	1,20
17.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 50,0 мм	0,20	0,50	1,20
18.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 52,0 мм	0,20	0,50	1,20
19.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 54,0 мм	0,20	0,50	1,20
20.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 56,0 мм	0,20	0,50	1,20
21.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 58,0 мм	0,20	0,50	1,20

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
22.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 60,0 мм	0,20	0,50	1,20
23.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 62,0 мм	0,20	0,50	1,20
24.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 64,0 мм	0,20	0,50	1,20
25.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 66,0 мм	0,20	0,50	1,20
26.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 68,0 мм	0,20	0,50	1,20
27.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 70,0 мм	0,20	0,50	1,20
28.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 72,0 мм	0,20	0,50	1,20
29.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 74,0 мм	0,20	0,50	1,20
30.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 76,0 мм	0,20	0,50	1,20
31.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 78,0 мм	0,20	0,50	1,20
32.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 80,0 мм	0,20	0,50	1,20
33.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 82,0 мм	0,20	0,50	1,20
34.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 84,0 мм	0,20	0,50	1,20
35.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 86,0 мм	0,20	0,50	1,20
36.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 88,0 мм	0,20	0,50	1,20
37.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 90,0 мм	0,20	0,50	1,20
38.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 92,0 мм	0,20	0,50	1,20
39.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 94,0 мм	0,20	0,50	1,20
40.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 96,0 мм	0,20	0,50	1,20
41.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 98,0 мм	0,20	0,50	1,20
42.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 100,0 мм	0,20	0,50	1,20

Таблица 4.2.11д – Характеристики изделия

№	Наименование	P, мм	e, мм	α (°)	β (°)
1.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 18,0 мм	1,20	0,07	3	35
2.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 20,0 мм	1,20	0,07	3	35
3.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 22,0 мм	1,20	0,07	3	35
4.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 24,0 мм	1,20	0,07	3	35
5.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 26,0 мм	1,20	0,07	3	35
6.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 28,0 мм	1,20	0,07	3	35
7.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 30,0 мм	1,20	0,07	3	35
8.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 32,0 мм	1,20	0,07	3	35
9.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 34,0 мм	1,20	0,07	3	35
10.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 36,0 мм	1,20	0,07	3	35
11.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 38,0 мм	1,20	0,07	3	35
12.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 40,0 мм	1,20	0,07	3	35
13.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 42,0 мм	1,20	0,07	3	35
14.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 44,0 мм	1,20	0,07	3	35
15.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 46,0 мм	1,20	0,07	3	35
16.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 48,0 мм	1,20	0,07	3	35
17.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 50,0 мм	1,20	0,07	3	35
18.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 52,0 мм	1,20	0,07	3	35
19.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 54,0 мм	1,20	0,07	3	35
20.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 56,0 мм	1,20	0,07	3	35
21.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 58,0 мм	1,20	0,07	3	35
22.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 60,0 мм	1,20	0,07	3	35
23.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 62,0 мм	1,20	0,07	3	35
24.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 64,0 мм	1,20	0,07	3	35
25.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 66,0 мм	1,20	0,07	3	35
26.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 68,0 мм	1,20	0,07	3	35
27.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 70,0 мм	1,20	0,07	3	35
28.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 72,0 мм	1,20	0,07	3	35
29.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 74,0 мм	1,20	0,07	3	35

№	Наименование	P, мм	e, мм	α (°)	β (°)
30.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 76,0 мм	1,20	0,07	3	35
31.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 78,0 мм	1,20	0,07	3	35
32.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 80,0 мм	1,20	0,07	3	35
33.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 82,0 мм	1,20	0,07	3	35
34.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 84,0 мм	1,20	0,07	3	35
35.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 86,0 мм	1,20	0,07	3	35
36.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 88,0 мм	1,20	0,07	3	35
37.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 90,0 мм	1,20	0,07	3	35
38.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 92,0 мм	1,20	0,07	3	35
39.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 94,0 мм	1,20	0,07	3	35
40.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 96,0 мм	1,20	0,07	3	35
41.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 98,0 мм	1,20	0,07	3	35
42.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 100,0 мм	1,20	0,07	3	35

Таблица 4.2.11e – Характеристики изделия

№	Наименование	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 18,0 мм	90	1,12 ± 0,50
2.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 20,0 мм	90	1,24 ± 0,50
3.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 22,0 мм	90	1,36 ± 0,50
4.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 24,0 мм	90	1,49 ± 0,50
5.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 26,0 мм	90	1,61 ± 0,50
6.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 28,0 мм	90	1,73 ± 0,50
7.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 30,0 мм	90	1,86 ± 0,50
8.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 32,0 мм	90	1,98 ± 0,50
9.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 34,0 мм	90	2,10 ± 0,50
10.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 36,0 мм	90	2,22 ± 0,50
11.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 38,0 мм	90	2,35 ± 0,50
12.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 40,0 мм	90	2,47 ± 0,50
13.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 42,0 мм	90	2,59 ± 0,50
14.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 44,0 мм	90	2,72 ± 0,50
15.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 46,0 мм	90	2,84 ± 0,50
16.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 48,0 мм	90	2,96 ± 0,50
17.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 50,0 мм	90	3,09 ± 1,00
18.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 52,0 мм	90	3,21 ± 1,00
19.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 54,0 мм	90	3,33 ± 1,00
20.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 56,0 мм	90	3,45 ± 1,00
21.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 58,0 мм	90	3,58 ± 1,00
22.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 60,0 мм	90	3,70 ± 1,00
23.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 62,0 мм	90	3,82 ± 1,00
24.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 64,0 мм	90	3,95 ± 1,00
25.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 66,0 мм	90	4,07 ± 1,00
26.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 68,0 мм	90	4,19 ± 1,00
27.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 70,0 мм	90	4,32 ± 1,00
28.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 72,0 мм	90	4,44 ± 1,00
29.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 74,0 мм	90	4,56 ± 1,00
30.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 76,0 мм	90	4,68 ± 1,00
31.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 78,0 мм	90	4,81 ± 1,00
32.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 80,0 мм	90	4,93 ± 1,00
33.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 82,0 мм	90	5,05 ± 2,00
34.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 84,0 мм	90	5,18 ± 2,00
35.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 86,0 мм	90	5,30 ± 2,00
36.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 88,0 мм	90	5,42 ± 2,00
37.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 90,0 мм	90	5,55 ± 2,00

№	Наименование	γ (°)	Масса, г
38.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 92,0 мм	90	$5,67 \pm 2,00$
39.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 94,0 мм	90	$5,79 \pm 2,00$
40.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 96,0 мм	90	$5,91 \pm 2,00$
41.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 98,0 мм	90	$6,04 \pm 2,00$
42.	Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина 100,0 мм	90	$6,16 \pm 2,00$

4.2.12. Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт блокирующий, канюлированный изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 6,5 мм;

- длина: 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0; 135,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

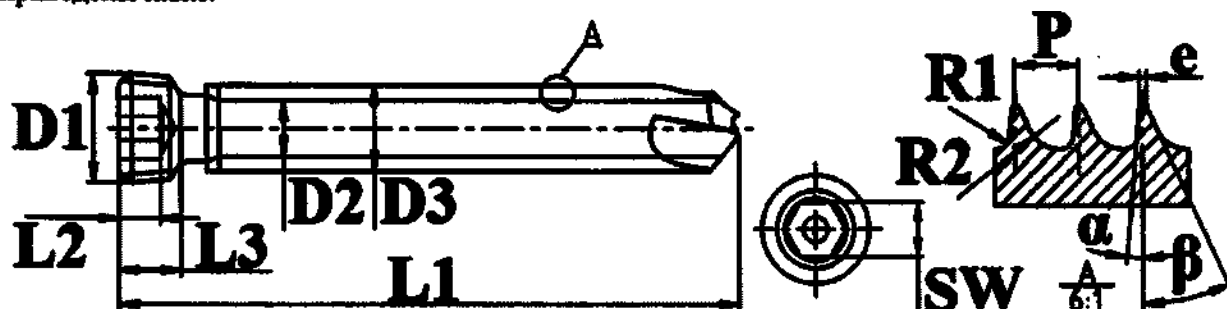


Таблица 4.2.12а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	$60,00 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,10$	$4,80 \pm 0,10$
2.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	$65,00 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,10$	$4,80 \pm 0,10$
3.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	$70,00 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,10$	$4,80 \pm 0,10$
4.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	$75,00 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,10$	$4,80 \pm 0,10$
5.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	$80,00 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,10$	$4,80 \pm 0,10$
6.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	$85,00 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,10$	$4,80 \pm 0,10$
7.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	$90,00 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,10$	$4,80 \pm 0,10$
8.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	$95,00 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,10$	$4,80 \pm 0,10$
9.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	$100,00 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,10$	$4,80 \pm 0,10$
10.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	$105,00 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,10$	$4,80 \pm 0,10$
11.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	$110,00 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,10$	$4,80 \pm 0,10$
12.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	$115,00 \pm 0,30$	$3,20 \pm 0,10$	$4,80 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
13.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	120,00 ± 0,30	3,20 ± 0,10	4,80 ± 0,10
14.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	125,00 ± 0,40	3,20 ± 0,10	4,80 ± 0,10
15.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	130,00 ± 0,40	3,20 ± 0,10	4,80 ± 0,10
16.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	135,00 ± 0,40	3,20 ± 0,10	4,80 ± 0,10

Таблица 4.2.12б – Характеристики изделия

№	Наименование	SW, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	4,50 ± 0,10	1,60	0,10
2.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	4,50 ± 0,10	1,60	0,10
3.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	4,50 ± 0,10	1,60	0,10
4.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	4,50 ± 0,10	1,60	0,10
5.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	4,50 ± 0,10	1,60	0,10
6.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	4,50 ± 0,10	1,60	0,10
7.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	4,50 ± 0,10	1,60	0,10
8.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	4,50 ± 0,10	1,60	0,10
9.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	4,50 ± 0,10	1,60	0,10
10.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	4,50 ± 0,10	1,60	0,10
11.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	4,50 ± 0,10	1,60	0,10
12.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	4,50 ± 0,10	1,60	0,10
13.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	4,50 ± 0,10	1,60	0,10
14.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	4,50 ± 0,10	1,60	0,10
15.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	4,50 ± 0,10	1,60	0,10
16.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	4,50 ± 0,10	1,60	0,10

Таблица 4.2.12в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20
2.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20
3.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
4.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20
5.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20
6.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20
7.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20
8.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20
9.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20
10.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20
11.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20
12.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20
13.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20
14.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20
15.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20
16.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	8,30 ± 0,20	4,20 ± 0,20	6,50 ± 0,20

Таблица 4.2.12г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм
1.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	0,30	0,80
2.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	0,30	0,80
3.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	0,30	0,80
4.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	0,30	0,80
5.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	0,30	0,80
6.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	0,30	0,80
7.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	0,30	0,80
8.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	0,30	0,80
9.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	0,30	0,80
10.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	0,30	0,80
11.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	0,30	0,80
12.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	0,30	0,80

№	Наименование	R1, мм	R2, мм
13.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	0,30	0,80
14.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	0,30	0,80
15.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	0,30	0,80
16.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	0,30	0,80

Таблица 4.2.12д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	5	25	4,18 ± 1,00
2.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	5	25	4,56 ± 1,00
3.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	5	25	4,95 ± 1,00
4.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	5	25	5,34 ± 2,00
5.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	5	25	5,72 ± 2,00
6.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	5	25	6,11 ± 2,00
7.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	5	25	6,49 ± 2,00
8.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	5	25	6,88 ± 2,00
9.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	5	25	7,27 ± 2,00
10.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	5	25	7,65 ± 2,00
11.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	5	25	8,04 ± 2,00
12.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	5	25	8,43 ± 2,00
13.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	5	25	8,81 ± 2,00
14.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	5	25	9,20 ± 2,00
15.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	5	25	9,59 ± 2,00
16.	Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	5	25	9,97 ± 2,00

4.2.13. Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт стягивающий DHS/DCS изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 12,0 мм;
- длина: 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

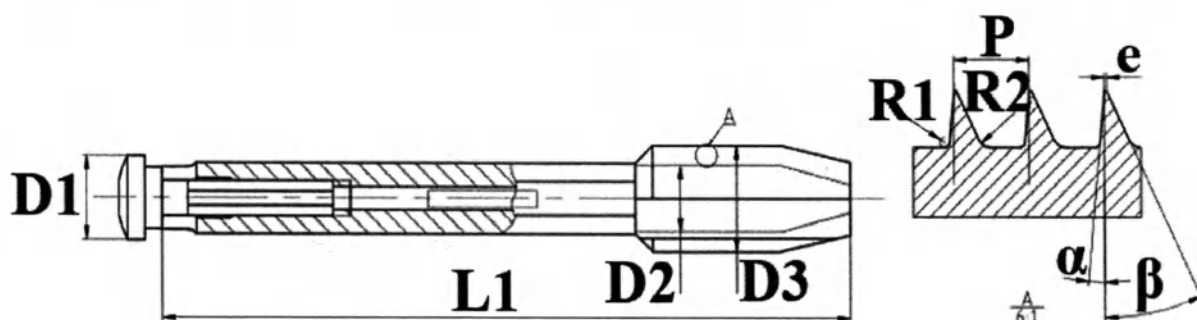


Таблица 4.2.13а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	D1, мм
1.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	9,50 ± 0,20
2.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	9,50 ± 0,20
3.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 65,0 мм	65,00 ± 0,30	9,50 ± 0,20
4.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	9,50 ± 0,20
5.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 75,0 мм	75,00 ± 0,30	9,50 ± 0,20
6.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	9,50 ± 0,20
7.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	9,50 ± 0,20
8.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	9,50 ± 0,20
9.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	9,50 ± 0,20
10.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	9,50 ± 0,20

Таблица 4.2.13б – Характеристики изделия

№	Наименование	D2, мм	D3, мм
1.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 55,0 мм	7,50 ± 0,20	12,00 ± 0,20
2.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 60,0 мм	7,50 ± 0,20	12,00 ± 0,20
3.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 65,0 мм	7,50 ± 0,20	12,00 ± 0,20
4.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 70,0 мм	7,50 ± 0,20	12,00 ± 0,20
5.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 75,0 мм	7,50 ± 0,20	12,00 ± 0,20
6.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 80,0 мм	7,50 ± 0,20	12,00 ± 0,20
7.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 85,0 мм	7,50 ± 0,20	12,00 ± 0,20
8.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 90,0 мм	7,50 ± 0,20	12,00 ± 0,20
9.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 95,0 мм	7,50 ± 0,20	12,00 ± 0,20
10.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 100,0 мм	7,50 ± 0,20	12,00 ± 0,20

Таблица 4.2.13в – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	P, мм	e, мм
1.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 55,0 мм	5	25	3,00	0,10
2.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 60,0 мм	5	25	3,00	0,10
3.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 65,0 мм	5	25	3,00	0,10
4.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 70,0 мм	5	25	3,00	0,10
5.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 75,0 мм	5	25	3,00	0,10
6.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 80,0 мм	5	25	3,00	0,10
7.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 85,0 мм	5	25	3,00	0,10
8.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 90,0 мм	5	25	3,00	0,10
9.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 95,0 мм	5	25	3,00	0,10
10.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 100,0 мм	5	25	3,00	0,10

Таблица 4.2.13г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	Масса, г
1.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 55,0 мм	0,20	0,50	11,60 ± 4,00
2.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 60,0 мм	0,20	0,50	12,50 ± 4,00
3.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 65,0 мм	0,20	0,50	13,40 ± 4,00
4.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 70,0 мм	0,20	0,50	14,30 ± 4,00
5.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 75,0 мм	0,20	0,50	15,20 ± 4,00
6.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 80,0 мм	0,20	0,50	16,10 ± 4,00
7.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 85,0 мм	0,20	0,50	17,00 ± 4,00
8.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 90,0 мм	0,20	0,50	17,90 ± 4,00
9.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 95,0 мм	0,20	0,50	18,80 ± 4,00
10.	Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина 100,0 мм	0,20	0,50	19,70 ± 4,00

4.2.14. Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 1,5 мм;
- длина: 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

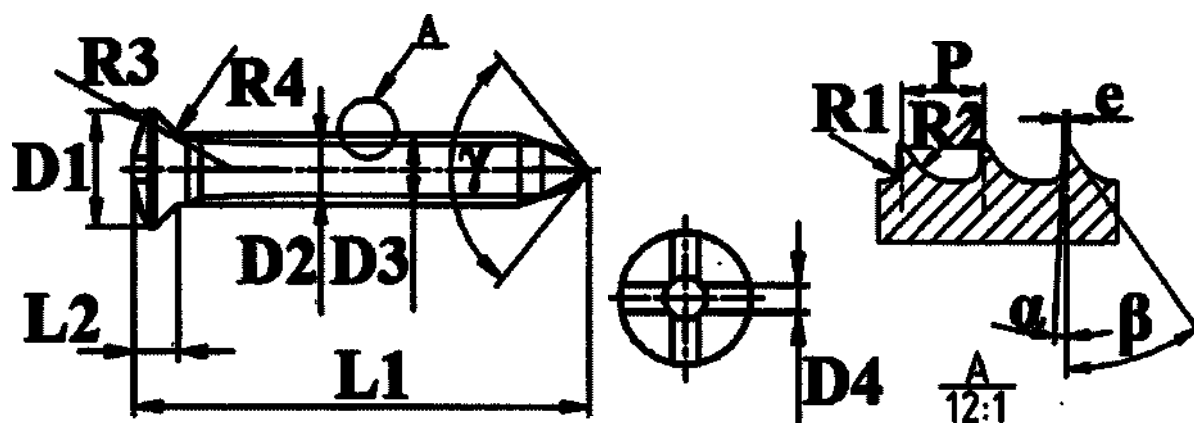


Таблица 4.2.14а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм
1.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	4,00 ± 0,30	1,10 ± 0,20
2.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	5,00 ± 0,30	1,10 ± 0,20
3.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	6,00 ± 0,30	1,00 ± 0,10
4.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	8,00 ± 0,30	1,00 ± 0,10
5.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,30	1,00 ± 0,10

Таблица 4.2.14б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$1,10 \pm 0,20$
2.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$1,10 \pm 0,20$
3.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$1,10 \pm 0,20$
4.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$1,10 \pm 0,20$
5.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	$2,50 \pm 0,20$	$1,10 \pm 0,20$

Таблица 4.2.14в – Характеристики изделия

№	Наименование	D3, мм	D4, мм
1.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	$1,50 \pm 0,20$	$0,50 \pm 0,20$
2.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	$1,50 \pm 0,20$	$0,50 \pm 0,20$
3.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	$1,50 \pm 0,20$	$0,50 \pm 0,20$
4.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	$1,50 \pm 0,20$	$0,50 \pm 0,20$
5.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	$1,50 \pm 0,20$	$0,50 \pm 0,20$

Таблица 4.2.14г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм
1.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	0,10	0,25
2.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	0,10	0,25
3.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	0,10	0,25
4.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	0,10	0,25
5.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	0,10	0,25

Таблица 4.2.14д – Характеристики изделия

№	Наименование	R3, мм	R4, мм
1.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	2,20	0,20
2.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	2,20	0,20
3.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	2,20	0,20
4.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	2,20	0,20
5.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	2,20	0,20

Таблица 4.2.14е – Характеристики изделия

№	Наименование	P, мм	e, мм
1.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	0,75	0,03
2.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	0,75	0,03
3.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	0,75	0,03
4.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	0,75	0,03
5.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	0,75	0,03

Таблица 4.2.14ж – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)
1.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	3	35
2.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	3	35
3.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	3	35
4.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	3	35
5.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	3	35

Таблица 4.2.14з – Характеристики изделия

№	Наименование	γ (°)	Масса, г
1.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	120	не более 0,10
2.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	120	не более 0,10
3.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	102	не более 0,10
4.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	102	не более 0,10
5.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	102	не более 0,10

4.2.15. Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 2,0 мм;
- длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

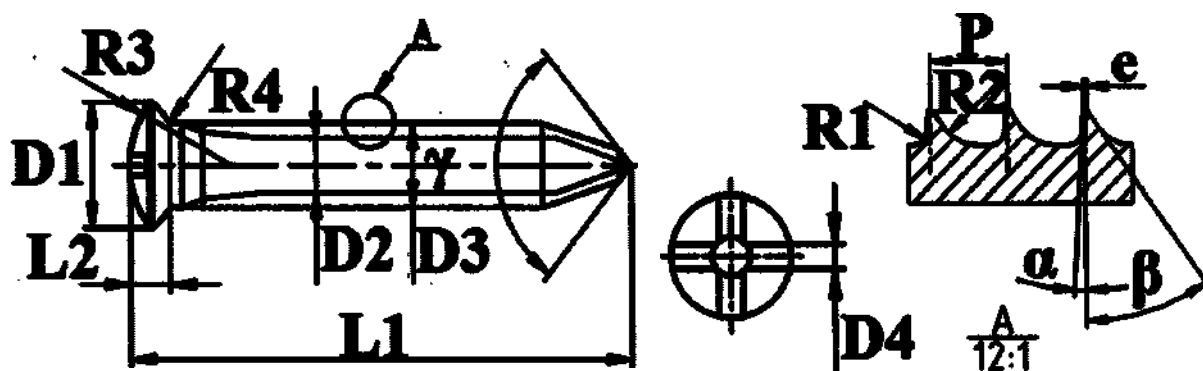


Таблица 4.2.15а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм
1.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	$6,00 \pm 0,30$	$1,00 \pm 0,10$
2.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	$8,00 \pm 0,30$	$1,00 \pm 0,10$
3.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	$10,00 \pm 0,30$	$1,00 \pm 0,10$
4.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	$12,00 \pm 0,30$	$1,00 \pm 0,10$
5.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	$14,00 \pm 0,30$	$1,00 \pm 0,10$
6.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	$16,00 \pm 0,30$	$1,00 \pm 0,10$

Таблица 4.2.15б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	$3,00 \pm 0,20$	$1,30 \pm 0,20$
2.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	$3,00 \pm 0,20$	$1,30 \pm 0,20$
3.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	$3,00 \pm 0,20$	$1,30 \pm 0,20$
4.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	$3,00 \pm 0,20$	$1,30 \pm 0,20$
5.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	$3,00 \pm 0,20$	$1,30 \pm 0,20$
6.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	$3,00 \pm 0,20$	$1,30 \pm 0,20$

Таблица 4.2.15в – Характеристики изделия

№	Наименование	D3, мм	D4, мм
1.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	$2,00 \pm 0,20$	$0,50 \pm 0,20$
2.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	$2,00 \pm 0,20$	$0,50 \pm 0,20$
3.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	$2,00 \pm 0,20$	$0,50 \pm 0,20$
4.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	$2,00 \pm 0,20$	$0,50 \pm 0,20$

№	Наименование	D3, мм	D4, мм
5.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
6.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20

Таблица 4.2.15г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм
1.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	0,15	0,30
2.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	0,15	0,30
3.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	0,15	0,30
4.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	0,15	0,30
5.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	0,15	0,30
6.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	0,15	0,30

Таблица 4.2.15д – Характеристики изделия

№	Наименование	R3, мм	P, мм
1.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	2,50	0,80
2.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	2,50	0,80
3.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	2,50	0,80
4.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	2,50	0,80
5.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	2,50	0,80
6.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	2,50	0,80

Таблица 4.2.15е – Характеристики изделия

№	Наименование	e, мм	α (°)	β (°)
1.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	0,03	5	35
2.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	0,03	5	35
3.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	0,03	5	35
4.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	0,03	5	35
5.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	0,03	5	35
6.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	0,03	5	35

Таблица 4.2.15ж – Характеристики изделия

№	Наименование	γ (°)	Масса, г
1.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	105	не более 0,10
2.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	105	не более 0,10
3.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	105	$0,10 \pm 0,05$
4.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	105	$0,12 \pm 0,05$
5.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	105	$0,13 \pm 0,05$
6.	Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	105	$0,14 \pm 0,05$

4.2.16. Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт самонарезающий, кортикальный изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 1,5 мм;

- длина: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

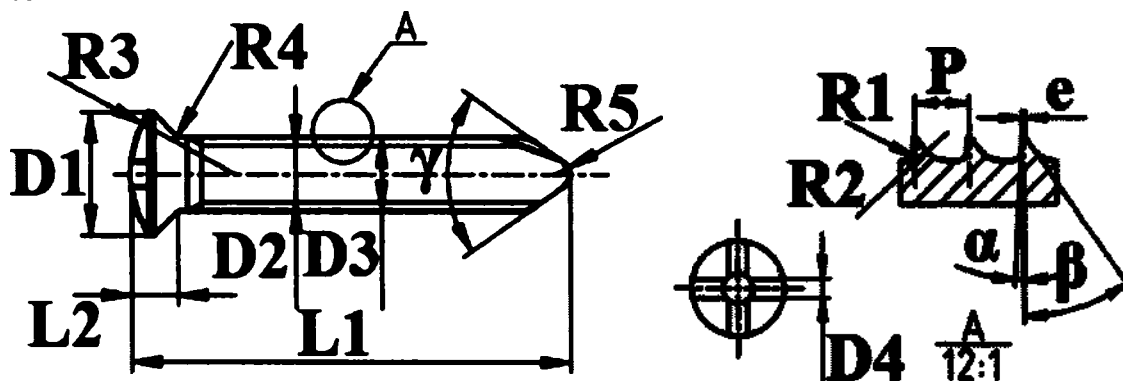


Таблица 4.2.16а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	$4,00 \pm 0,20$	$1,00 \pm 0,10$
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	$5,00 \pm 0,20$	$1,00 \pm 0,10$
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$1,00 \pm 0,10$
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	$7,00 \pm 0,30$	$1,00 \pm 0,10$
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	$8,00 \pm 0,30$	$1,00 \pm 0,10$
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	$10,00 \pm 0,30$	$1,00 \pm 0,10$
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	$12,00 \pm 0,30$	$1,00 \pm 0,10$
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	$14,00 \pm 0,30$	$1,00 \pm 0,10$
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	$16,00 \pm 0,30$	$1,00 \pm 0,10$
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,30$	$1,00 \pm 0,10$
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,30$	$1,00 \pm 0,10$

Таблица 4.2.16б – Характеристики изделия

№	Наименование	P, мм	e, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	0,50	0,03
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	0,50	0,03
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	0,50	0,03
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	0,50	0,03
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	0,50	0,03
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	0,50	0,03
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	0,50	0,03
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	0,50	0,03
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	0,50	0,03
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	0,50	0,03
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	0,50	0,03

Таблица 4.2.16в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	2,50 ± 0,20	1,15 ± 0,20
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	2,50 ± 0,20	1,15 ± 0,20
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	2,50 ± 0,20	1,15 ± 0,20
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	2,50 ± 0,20	1,15 ± 0,20
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	2,50 ± 0,20	1,15 ± 0,20
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	2,50 ± 0,20	1,15 ± 0,20
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	2,50 ± 0,20	1,15 ± 0,20
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	2,50 ± 0,20	1,15 ± 0,20
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	2,50 ± 0,20	1,15 ± 0,20
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	2,50 ± 0,20	1,15 ± 0,20
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	2,50 ± 0,20	1,15 ± 0,20

Таблица 4.2.16г – Характеристики изделия

№	Наименование	D3, мм	D4, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	1,50 ± 0,20	0,50 ± 0,20
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	1,50 ± 0,20	0,50 ± 0,20
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	1,50 ± 0,20	0,50 ± 0,20
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	1,50 ± 0,20	0,50 ± 0,20
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	1,50 ± 0,20	0,50 ± 0,20
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	1,50 ± 0,20	0,50 ± 0,20
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	1,50 ± 0,20	0,50 ± 0,20
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	1,50 ± 0,20	0,50 ± 0,20
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	1,50 ± 0,20	0,50 ± 0,20
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	1,50 ± 0,20	0,50 ± 0,20
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	1,50 ± 0,20	0,50 ± 0,20

Таблица 4.2.16д – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	0,10	0,30
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	0,10	0,30
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	0,10	0,30
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	0,10	0,30
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	0,10	0,30
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	0,10	0,30

№	Наименование	R1, мм	R2, мм
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	0,10	0,30
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	0,10	0,30
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	0,10	0,30
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	0,10	0,30
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	0,10	0,30

Таблица 4.2.16е – Характеристики изделия

№	Наименование	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	2,20	0,10	0,30
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	2,20	0,10	0,30
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	2,20	0,10	0,30
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	2,20	0,10	0,30
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	2,20	0,10	0,30
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	2,20	0,10	0,30
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	2,20	0,10	0,30
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	2,20	0,10	0,30
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	2,20	0,10	0,30
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	2,20	0,10	0,30
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	2,20	0,10	0,30

Таблица 4.2.16ж – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	3	35
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	3	35
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	3	35
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	3	35
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	3	35
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	3	35
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	3	35
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	3	35
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	3	35
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	3	35
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	3	35

Таблица 4.2.16з – Характеристики изделия

№	Наименование	γ (°)	Масса, г
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 4,0 мм	70	не более 0,10
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 5,0 мм	70	не более 0,10
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	70	не более 0,10
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	70	не более 0,10
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	70	не более 0,10
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	70	не более 0,10
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	70	не более 0,10
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	70	не более 0,10
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	70	не более 0,10
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	70	не более 0,10
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	70	0,10 ± 0,05

4.2.17. Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт самонарезающий, кортикальный изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 2,0 мм;
- длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

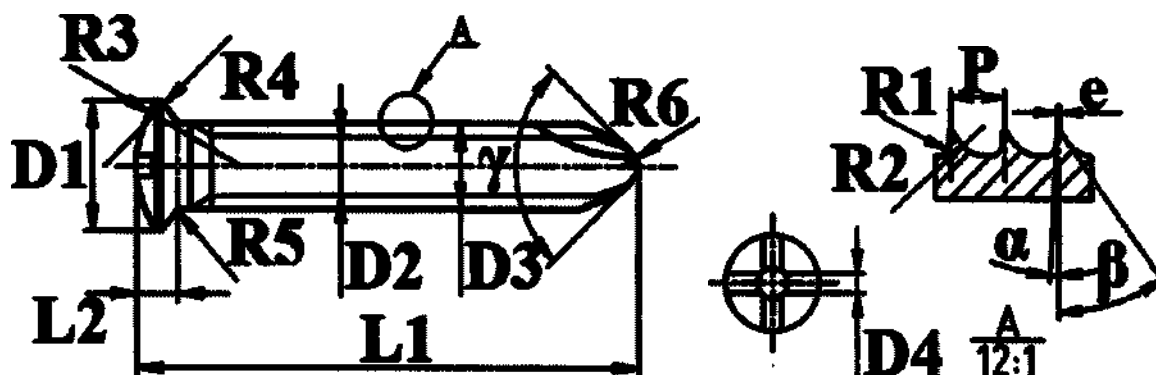


Таблица 4.2.17а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	6,00 ± 0,30	1,00 ± 0,10
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	8,00 ± 0,30	1,00 ± 0,10
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,30	1,00 ± 0,10
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,30	1,00 ± 0,10
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,30	1,00 ± 0,10
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,30	1,00 ± 0,10
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,30	1,00 ± 0,10
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,30	1,00 ± 0,10
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,30	1,00 ± 0,10
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,30	1,00 ± 0,10
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,30	1,00 ± 0,10
12.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,30	1,00 ± 0,10

Таблица 4.2.17б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20
12.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	3,00 ± 0,20	1,35 ± 0,20

Таблица 4.2.17в – Характеристики изделия

№	Наименование	D3, мм	D4, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20
12.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	2,00 ± 0,20	0,50 ± 0,20

Таблица 4.2.17г – Характеристики изделия

№	Наименование	P, мм	e, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	0,80	0,03
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	0,80	0,03
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	0,80	0,03
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	0,80	0,03
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	0,80	0,03
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	0,80	0,03
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	0,80	0,03
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	0,80	0,03
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	0,80	0,03
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	0,80	0,03
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	0,80	0,03
12.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	0,80	0,03

Таблица 4.2.17д – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	0,15	0,30	2,50
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	0,15	0,30	2,50
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	0,15	0,30	2,50
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	0,15	0,30	2,50
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	0,15	0,30	2,50
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	0,15	0,30	2,50
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	0,15	0,30	2,50
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	0,15	0,30	2,50
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	0,15	0,30	2,50
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	0,15	0,30	2,50
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	0,15	0,30	2,50
12.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	0,15	0,30	2,50

Таблица 4.2.17е – Характеристики изделия

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	R6, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	2,00	0,10	0,50
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	2,00	0,10	0,50
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	2,00	0,10	0,50

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	R6, мм
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	2,00	0,10	0,50
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	2,00	0,10	0,50
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	2,00	0,10	0,50
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	2,00	0,10	0,50
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	2,00	0,10	0,50
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	2,00	0,10	0,50
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	2,00	0,10	0,50
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	2,00	0,10	0,50
12.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	2,00	0,10	0,50

Таблица 4.2.17ж – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	5	35
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	5	35
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	5	35
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	5	35
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	5	35
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	5	35
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	5	35
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	5	35
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	5	35
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	5	35
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	5	35
12.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	5	35

Таблица 4.2.17з – Характеристики изделия

№	Наименование	γ (°)	Масса, г
1.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	90	не более 0,10
2.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	90	не более 0,10
3.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	90	$0,10 \pm 0,05$
4.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	90	$0,12 \pm 0,05$
5.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	90	$0,13 \pm 0,05$
6.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	90	$0,15 \pm 0,05$
7.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	90	$0,16 \pm 0,05$
8.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	90	$0,18 \pm 0,05$
9.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	90	$0,19 \pm 0,05$
10.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	90	$0,20 \pm 0,05$
11.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	90	$0,22 \pm 0,05$
12.	Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	90	$0,23 \pm 0,05$

4.2.18. Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт кортикальный изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 2,5 мм;
- длина: 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

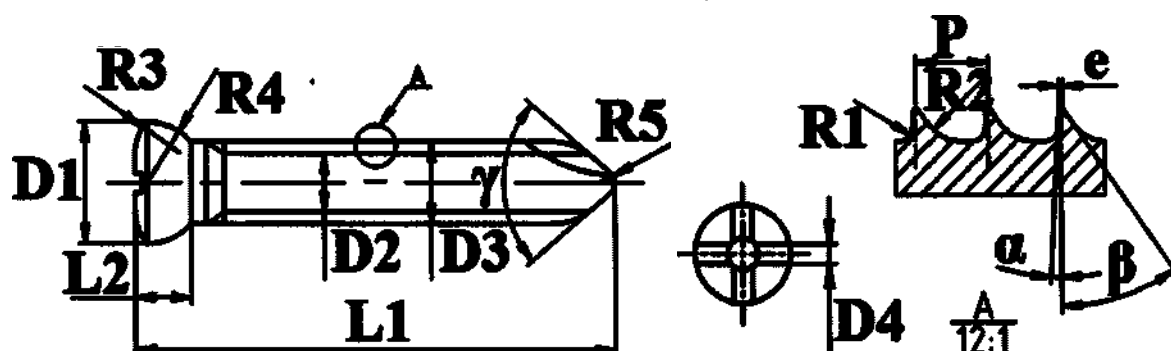


Таблица 4.2.18а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	P, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 8,0 мм	8,00 ± 0,30	1,90 ± 0,10	1,00
2.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,30	1,90 ± 0,10	1,00
3.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,30	1,90 ± 0,10	1,00
4.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,30	1,90 ± 0,10	1,00
5.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,30	1,90 ± 0,10	1,00
6.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,30	1,90 ± 0,10	1,00
7.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,30	1,90 ± 0,10	1,00
8.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,30	1,90 ± 0,10	1,00
9.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,30	1,90 ± 0,10	1,00
10.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,30	1,90 ± 0,10	1,00
11.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,30	1,90 ± 0,10	1,00
12.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,30	1,90 ± 0,10	1,00

Таблица 4.2.18б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 8,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20
2.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 10,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20
3.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 12,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20
4.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 14,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20
5.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 16,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20
6.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 18,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20
7.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 20,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20
8.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 22,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20
9.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 24,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20
10.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 26,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20
11.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 28,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20
12.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 30,0 мм	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20

Таблица 4.2.18в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	e, мм	α (°)
1.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 8,0 мм	0,60 ± 0,20	0,03	10
2.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 10,0 мм	0,60 ± 0,20	0,03	10
3.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 12,0 мм	0,60 ± 0,20	0,03	10
4.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 14,0 мм	0,60 ± 0,20	0,03	10
5.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 16,0 мм	0,60 ± 0,20	0,03	10
6.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 18,0 мм	0,60 ± 0,20	0,03	10
7.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 20,0 мм	0,60 ± 0,20	0,03	10
8.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 22,0 мм	0,60 ± 0,20	0,03	10
9.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 24,0 мм	0,60 ± 0,20	0,03	10

10.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 26,0 мм	0,60 ± 0,20	0,03	10
11.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 28,0 мм	0,60 ± 0,20	0,03	10
12.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 30,0 мм	0,60 ± 0,20	0,03	10

Таблица 4.2.18г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 8,0 мм	0,20	0,60	1,50
2.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 10,0 мм	0,20	0,60	1,50
3.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 12,0 мм	0,20	0,60	1,50
4.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 14,0 мм	0,20	0,60	1,50
5.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 16,0 мм	0,20	0,60	1,50
6.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 18,0 мм	0,20	0,60	1,50
7.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 20,0 мм	0,20	0,60	1,50
8.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 22,0 мм	0,20	0,60	1,50
9.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 24,0 мм	0,20	0,60	1,50
10.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 26,0 мм	0,20	0,60	1,50
11.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 28,0 мм	0,20	0,60	1,50
12.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 30,0 мм	0,20	0,60	1,50

Таблица 4.2.18г – Характеристики изделия

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	β (°)
1.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 8,0 мм	2,00	0,50	35
2.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 10,0 мм	2,00	0,50	35
3.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 12,0 мм	2,00	0,50	35
4.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 14,0 мм	2,00	0,50	35
5.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 16,0 мм	2,00	0,50	35
6.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 18,0 мм	2,00	0,50	35
7.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 20,0 мм	2,00	0,50	35
8.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 22,0 мм	2,00	0,50	35
9.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 24,0 мм	2,00	0,50	35
10.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 26,0 мм	2,00	0,50	35
11.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 28,0 мм	2,00	0,50	35
12.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 30,0 мм	2,00	0,50	35

Таблица 4.2.18д – Характеристики изделия

№	Наименование	γ (°)	Масса, г
1.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 8,0 мм	80	0,30 ± 0,10
2.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 10,0 мм	80	0,31 ± 0,10
3.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 12,0 мм	80	0,32 ± 0,10
4.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 14,0 мм	80	0,34 ± 0,10
5.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 16,0 мм	80	0,35 ± 0,10
6.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 18,0 мм	80	0,36 ± 0,10
7.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 20,0 мм	80	0,38 ± 0,10
8.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 22,0 мм	80	0,39 ± 0,10
9.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 24,0 мм	80	0,40 ± 0,10
10.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 26,0 мм	80	0,42 ± 0,10
11.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 28,0 мм	80	0,43 ± 0,10
12.	Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина 30,0 мм	80	0,45 ± 0,10

4.2.19. Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт кортикальный изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 2,7 мм;
- длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

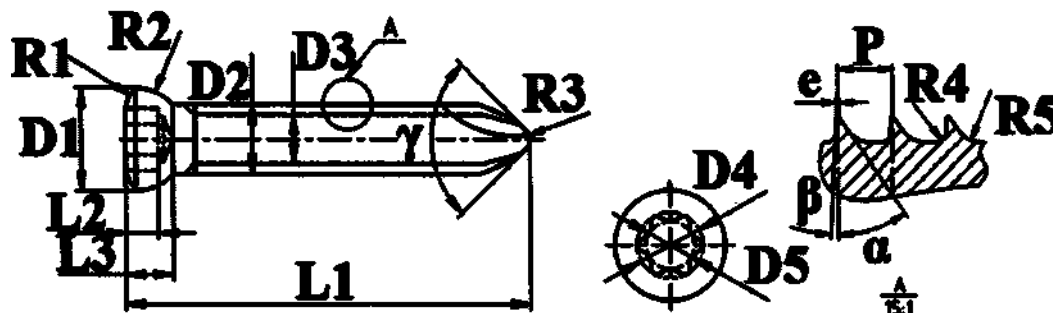


Таблица 4.2.19а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	6,00 ± 0,20	1,30 ± 0,10	1,90 ± 0,10
2.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	8,00 ± 0,20	1,30 ± 0,10	1,90 ± 0,10
3.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,20	1,30 ± 0,10	1,90 ± 0,10
4.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,20	1,30 ± 0,10	1,90 ± 0,10
5.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	1,90 ± 0,10
6.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,20	1,30 ± 0,10	1,90 ± 0,10
7.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	1,30 ± 0,10	1,90 ± 0,10
8.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	1,30 ± 0,10	1,90 ± 0,10
9.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	1,30 ± 0,10	1,90 ± 0,10
10.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	1,30 ± 0,10	1,90 ± 0,10
11.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	1,30 ± 0,10	1,90 ± 0,10
12.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	1,30 ± 0,10	1,90 ± 0,10
13.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	1,30 ± 0,10	1,90 ± 0,10
14.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	1,90 ± 0,10
15.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	1,90 ± 0,10
16.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	1,90 ± 0,10
17.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	1,90 ± 0,10
18.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	1,30 ± 0,10	1,90 ± 0,10

Таблица 4.2.19б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20
2.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20
3.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20
4.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20
5.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20
6.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20
7.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20
8.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20
9.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
10.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20
11.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20
12.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20
13.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20
14.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20
15.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20
16.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20
17.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20
18.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	4,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	1,90 ± 0,20

Таблица 4.2.19в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	2,40 ± 0,10	1,75 ± 0,10	1,00
2.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	2,40 ± 0,10	1,75 ± 0,10	1,00
3.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	2,40 ± 0,10	1,75 ± 0,10	1,00
4.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	2,40 ± 0,10	1,75 ± 0,10	1,00
5.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	2,40 ± 0,10	1,75 ± 0,10	1,00
6.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	2,40 ± 0,10	1,75 ± 0,10	1,00
7.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	2,40 ± 0,10	1,75 ± 0,10	1,00
8.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	2,40 ± 0,10	1,75 ± 0,10	1,00
9.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	2,40 ± 0,10	1,75 ± 0,10	1,00
10.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	2,40 ± 0,10	1,75 ± 0,10	1,00
11.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	2,40 ± 0,10	1,75 ± 0,10	1,00
12.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	2,40 ± 0,10	1,75 ± 0,10	1,00
13.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	2,40 ± 0,10	1,75 ± 0,10	1,00
14.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	2,40 ± 0,10	1,75 ± 0,10	1,00
15.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	2,40 ± 0,10	1,75 ± 0,10	1,00
16.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	2,40 ± 0,10	1,75 ± 0,10	1,00
17.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	2,40 ± 0,10	1,75 ± 0,10	1,00
18.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	2,40 ± 0,10	1,75 ± 0,10	1,00

Таблица 4.2.19г – Характеристики изделия

№	Наименование	e, мм	R1, мм	R2, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	0,03	1,50	2,00
2.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	0,03	1,50	2,00
3.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	0,03	1,50	2,00
4.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	0,03	1,50	2,00
5.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	0,03	1,50	2,00
6.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	0,03	1,50	2,00
7.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	0,03	1,50	2,00
8.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	0,03	1,50	2,00
9.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	0,03	1,50	2,00
10.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	0,03	1,50	2,00
11.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	0,03	1,50	2,00
12.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	0,03	1,50	2,00
13.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	0,03	1,50	2,00
14.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	0,03	1,50	2,00
15.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	0,03	1,50	2,00
16.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	0,03	1,50	2,00
17.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	0,03	1,50	2,00
18.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	0,03	1,50	2,00

Таблица 4.2.19д – Характеристики изделия

№	Наименование	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	0,50	0,20	0,60
2.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	0,50	0,20	0,60
3.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	0,50	0,20	0,60
4.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	0,50	0,20	0,60
5.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	0,50	0,20	0,60
6.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	0,50	0,20	0,60
7.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	0,50	0,20	0,60
8.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	0,50	0,20	0,60
9.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	0,50	0,20	0,60
10.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	0,50	0,20	0,60
11.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	0,50	0,20	0,60
12.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	0,50	0,20	0,60
13.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	0,50	0,20	0,60
14.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	0,50	0,20	0,60
15.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	0,50	0,20	0,60
16.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	0,50	0,20	0,60
17.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	0,50	0,20	0,60
18.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	0,50	0,20	0,60

Таблица 4.2.19е – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	35	10	90	0,10 ± 0,05
2.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	35	10	90	0,14 ± 0,05
3.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	35	10	90	0,17 ± 0,05
4.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	35	10	90	0,21 ± 0,05
5.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	35	10	90	0,25 ± 0,05
6.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	35	10	90	0,29 ± 0,05
7.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	35	10	90	0,33 ± 0,10
8.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	35	10	90	0,37 ± 0,10
9.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	35	10	90	0,41 ± 0,10
10.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	35	10	90	0,45 ± 0,10
11.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	35	10	90	0,49 ± 0,10
12.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	35	10	90	0,53 ± 0,20
13.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	35	10	90	0,57 ± 0,20
14.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	35	10	90	0,60 ± 0,20
15.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	35	10	90	0,64 ± 0,20
16.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	35	10	90	0,68 ± 0,20
17.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	35	10	90	0,72 ± 0,20
18.	Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	35	10	90	0,76 ± 0,20

4.2.20. Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт кортикальный изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 3,5 мм;
- длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

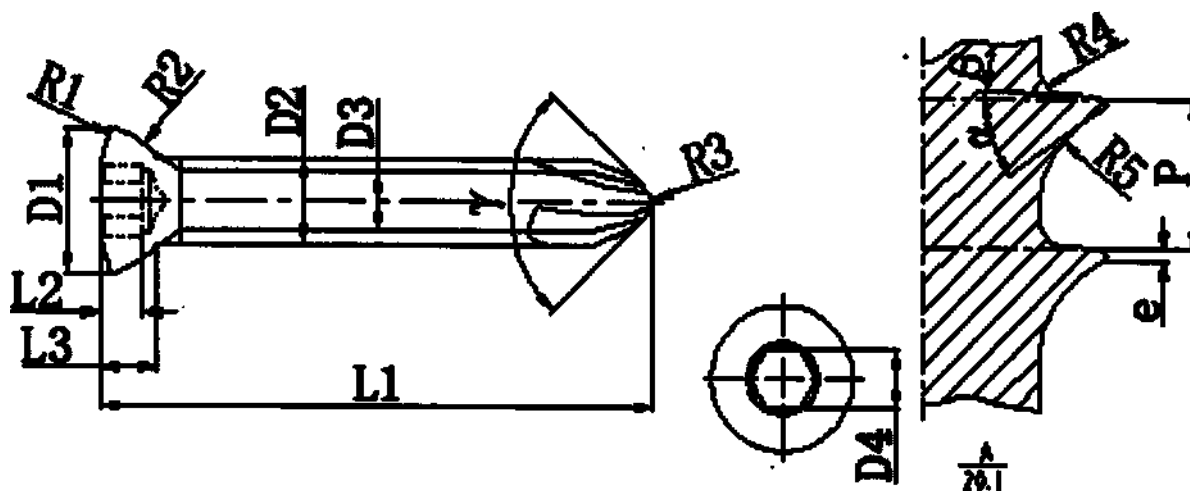


Таблица 4.2.20а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,10
2.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,10
3.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,10
4.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,10
5.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,10
6.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,10
7.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,10
8.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,10
9.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,10
10.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,10
11.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,10
12.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,10
13.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,10
14.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,10
15.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,10
16.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,10
17.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,10
18.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,10
19.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,10
20.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,10
21.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,10

Таблица 4.2.20б – Характеристики изделия

№	Наименование	P, мм	e, мм	α (°)
1.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	1,25	0,10	35
2.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	1,25	0,10	35
3.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	1,25	0,10	35
4.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	1,25	0,10	35
5.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	1,25	0,10	35
6.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	1,25	0,10	35
7.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	1,25	0,10	35
8.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	1,25	0,10	35
9.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	1,25	0,10	35

№	Наименование	P, мм	e, мм	α (°)
10.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	1,25	0,10	35
11.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	1,25	0,10	35
12.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	1,25	0,10	35
13.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	1,25	0,10	35
14.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	1,25	0,10	35
15.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	1,25	0,10	35
16.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	1,25	0,10	35
17.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	1,25	0,10	35
18.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	1,25	0,10	35
19.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	1,25	0,10	35
20.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	1,25	0,10	35
21.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	1,25	0,10	35

Таблица 4.2.20в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
2.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
3.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
4.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
5.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
6.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
7.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
8.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
9.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
10.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
11.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
12.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
13.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
14.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
15.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
16.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
17.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
18.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
19.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
20.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
21.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	5,95 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20

Таблица 4.2.20г – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	R1, мм	R2, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	2,50 ± 0,10	6,00	3,00
2.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	2,50 ± 0,10	6,00	3,00
3.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	2,50 ± 0,10	6,00	3,00
4.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	2,50 ± 0,10	6,00	3,00
5.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	2,50 ± 0,10	6,00	3,00
6.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	2,50 ± 0,10	6,00	3,00
7.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	2,50 ± 0,10	6,00	3,00
8.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	2,50 ± 0,10	6,00	3,00
9.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	2,50 ± 0,10	6,00	3,00
10.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	2,50 ± 0,10	6,00	3,00
11.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	2,50 ± 0,10	6,00	3,00
12.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	2,50 ± 0,10	6,00	3,00
13.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	2,50 ± 0,10	6,00	3,00

№	Наименование	D4, мм	R1, мм	R2, мм
14.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	2,50 ± 0,10	6,00	3,00
15.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	2,50 ± 0,10	6,00	3,00
16.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	2,50 ± 0,10	6,00	3,00
17.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	2,50 ± 0,10	6,00	3,00
18.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	2,50 ± 0,10	6,00	3,00
19.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	2,50 ± 0,10	6,00	3,00
20.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	2,50 ± 0,10	6,00	3,00
21.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	2,50 ± 0,10	6,00	3,00

Таблица 4.2.20д – Характеристики изделия

№	Наименование	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	0,50	0,20	0,80
2.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	0,50	0,20	0,80
3.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	0,50	0,20	0,80
4.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	0,50	0,20	0,80
5.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	0,50	0,20	0,80
6.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	0,50	0,20	0,80
7.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	0,50	0,20	0,80
8.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	0,50	0,20	0,80
9.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	0,50	0,20	0,80
10.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	0,50	0,20	0,80
11.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	0,50	0,20	0,80
12.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	0,50	0,20	0,80
13.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	0,50	0,20	0,80
14.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	0,50	0,20	0,80
15.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	0,50	0,20	0,80
16.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	0,50	0,20	0,80
17.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	0,50	0,20	0,80
18.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	0,50	0,20	0,80
19.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	0,50	0,20	0,80
20.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	0,50	0,20	0,80
21.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	0,50	0,20	0,80

Таблица 4.2.20е – Характеристики изделия

№	Наименование	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	3	90	0,36 ± 0,10
2.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	3	90	0,41 ± 0,10
3.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	3	90	0,46 ± 0,10
4.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	3	90	0,51 ± 0,20
5.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	3	90	0,56 ± 0,20
6.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	3	90	0,61 ± 0,20
7.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	3	90	0,66 ± 0,20
8.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	3	90	0,71 ± 0,20
9.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	3	90	0,76 ± 0,20
10.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	3	90	0,81 ± 0,20
11.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	3	90	0,86 ± 0,20
12.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	3	90	0,91 ± 0,20
13.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	3	90	0,96 ± 0,20
14.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	3	90	1,01 ± 0,50
15.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	3	90	1,06 ± 0,50
16.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	3	90	1,11 ± 0,50
17.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	3	90	1,16 ± 0,50

№	Наименование	β (°)	γ (°)	Масса, г
18.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	3	90	$1,21 \pm 0,50$
19.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	3	90	$1,26 \pm 0,50$
20.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	3	90	$1,31 \pm 0,50$
21.	Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	3	90	$1,37 \pm 0,50$

4.2.21. Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт кортикальный изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 4,5 мм;
- длина: 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

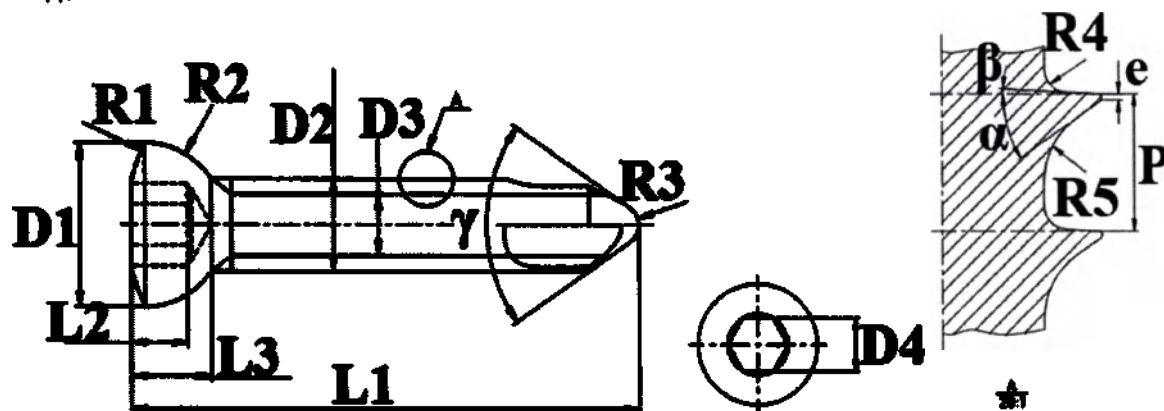


Таблица 4.2.21а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,00 \pm 0,10$
2.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,00 \pm 0,10$
3.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	$22,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,00 \pm 0,10$
4.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	$24,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,00 \pm 0,10$
5.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	$26,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,00 \pm 0,10$
6.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	$28,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,00 \pm 0,10$
7.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	$30,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,00 \pm 0,10$
8.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	$32,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,00 \pm 0,10$
9.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	$34,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,00 \pm 0,10$
10.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	$36,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,00 \pm 0,10$
11.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	$38,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,00 \pm 0,10$
12.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	$40,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,00 \pm 0,10$
13.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	$42,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,00 \pm 0,10$
14.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	$44,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,00 \pm 0,10$
15.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	$46,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,00 \pm 0,10$
16.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	$48,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,00 \pm 0,10$
17.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	$50,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,00 \pm 0,10$
18.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	$52,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,00 \pm 0,10$
19.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	$54,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,00 \pm 0,10$
20.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	$56,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,00 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
21.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	58,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,00 ± 0,10
22.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,00 ± 0,10

Таблица 4.2.21б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 18,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
2.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
3.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
4.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
5.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
6.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
7.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
8.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
9.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
10.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
11.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
12.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
13.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
14.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
15.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
16.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
17.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
18.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
19.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
20.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
21.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
22.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20

Таблица 4.2.21в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 18,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
2.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
3.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
4.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
5.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
6.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
7.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
8.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
9.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
10.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
11.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
12.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
13.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
14.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
15.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
16.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
17.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
18.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
19.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
20.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
21.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75	0,10
22.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	3,50 ± 0,10	1,75	0,10

Таблица 4.2.21г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 18,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
2.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
3.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
4.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
5.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
6.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
7.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
8.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
9.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
10.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
11.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
12.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
13.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
14.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
15.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
16.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
17.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
18.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
19.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
20.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
21.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00
22.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	8,50	4,00	1,00	0,30	1,00

Таблица 4.2.21д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 18,0 мм	35	3	90	1,15 ± 0,50
2.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	35	3	90	1,23 ± 0,50
3.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	35	3	90	1,31 ± 0,50
4.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	35	3	90	1,39 ± 0,50
5.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	35	3	90	1,48 ± 0,50
6.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	35	3	90	1,56 ± 0,50
7.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	35	3	90	1,64 ± 0,50
8.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	35	3	90	1,72 ± 0,50
9.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	35	3	90	1,80 ± 0,50
10.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	35	3	90	1,89 ± 0,50
11.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	35	3	90	1,97 ± 0,50
12.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	35	3	90	2,05 ± 0,50
13.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	35	3	90	2,13 ± 0,50
14.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	35	3	90	2,21 ± 0,50
15.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	35	3	90	2,29 ± 0,50
16.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	35	3	90	2,38 ± 0,50
17.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	35	3	90	2,46 ± 0,50
18.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	35	3	90	2,54 ± 0,50
19.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	35	3	90	2,62 ± 0,50
20.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	35	3	90	2,70 ± 0,50
21.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	35	3	90	2,78 ± 0,50
22.	Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	35	3	90	2,87 ± 0,50

4.2.22. Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 6,5 мм;
- длина: 20,0; 25,0; 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

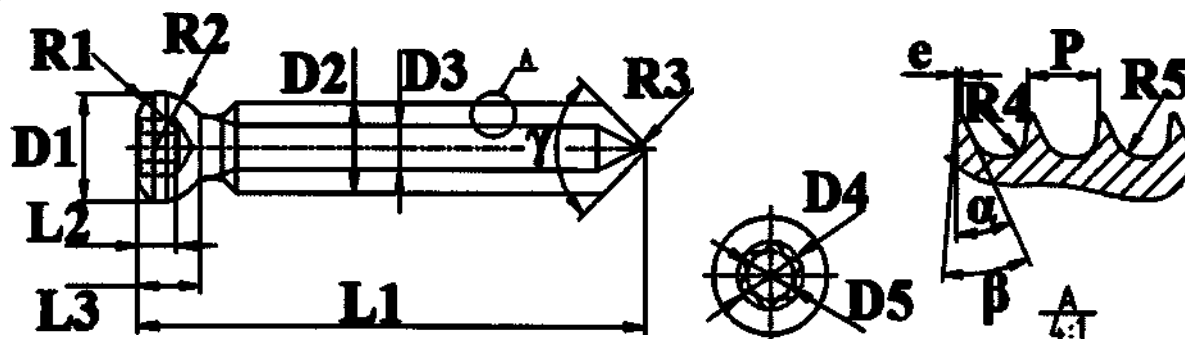


Таблица 4.2.22а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
2.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 25,0 мм	25,00 ± 0,20	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
3.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
4.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	35,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
5.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
6.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	45,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
7.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
8.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
9.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
10.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	65,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
11.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
12.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	75,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
13.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
14.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
15.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
16.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
17.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
18.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	105,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
19.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	110,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10

Таблица 4.2.226 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	P, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 20,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20	2,75
2.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 25,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20	2,75
3.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20	2,75
4.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20	2,75
5.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20	2,75
6.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20	2,75
7.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20	2,75
8.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20	2,75
9.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20	2,75
10.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20	2,75
11.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20	2,75
12.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20	2,75
13.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20	2,75
14.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20	2,75
15.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20	2,75
16.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20	2,75
17.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20	2,75
18.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20	2,75
19.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	7,90 ± 0,20	6,50 ± 0,20	2,75

Таблица 4.2.22в – Характеристики изделия

№	Наименование	D3, мм	D4, мм	D5, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 20,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
2.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 25,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
3.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
4.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
5.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
6.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
7.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
8.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
9.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
10.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
11.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
12.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
13.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
14.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
15.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
16.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
17.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
18.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
19.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10

Таблица 4.2.22г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 20,0 мм	2,80	4,00	0,50
2.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 25,0 мм	2,80	4,00	0,50
3.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	2,80	4,00	0,50
4.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	2,80	4,00	0,50
5.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	2,80	4,00	0,50

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
6.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	2,80	4,00	0,50
7.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	2,80	4,00	0,50
8.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	2,80	4,00	0,50
9.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	2,80	4,00	0,50
10.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	2,80	4,00	0,50
11.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	2,80	4,00	0,50
12.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	2,80	4,00	0,50
13.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	2,80	4,00	0,50
14.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	2,80	4,00	0,50
15.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	2,80	4,00	0,50
16.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	2,80	4,00	0,50
17.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	2,80	4,00	0,50
18.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	2,80	4,00	0,50
19.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	2,80	4,00	0,50

Таблица 4.2.22д – Характеристики изделия

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	e, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 20,0 мм	0,80	1,20	0,20
2.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 25,0 мм	0,80	1,20	0,20
3.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	0,80	1,20	0,20
4.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	0,80	1,20	0,20
5.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	0,80	1,20	0,20
6.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	0,80	1,20	0,20
7.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	0,80	1,20	0,20
8.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	0,80	1,20	0,20
9.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	0,80	1,20	0,20
10.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	0,80	1,20	0,20
11.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	0,80	1,20	0,20

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	e, мм
12.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	0,80	1,20	0,20
13.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	0,80	1,20	0,20
14.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	0,80	1,20	0,20
15.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	0,80	1,20	0,20
16.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	0,80	1,20	0,20
17.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	0,80	1,20	0,20
18.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	0,80	1,20	0,20
19.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	0,80	1,20	0,20

Таблица 4.2.22е – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 20,0 мм	25	30	90	1,58 ± 0,50
2.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 25,0 мм	25	30	90	1,88 ± 0,50
3.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	25	30	90	2,19 ± 0,50
4.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	25	30	90	2,50 ± 0,50
5.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	25	30	90	2,81 ± 0,50
6.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	25	30	90	3,11 ± 1,00
7.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	25	30	90	3,42 ± 1,00
8.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	25	30	90	3,73 ± 1,00
9.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	25	30	90	4,04 ± 1,00
10.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	25	30	90	4,34 ± 1,00
11.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	25	30	90	4,65 ± 1,00
12.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	25	30	90	4,96 ± 1,00
13.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	25	30	90	5,27 ± 2,00
14.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	25	30	90	5,57 ± 2,00
15.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	25	30	90	5,88 ± 2,00
16.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	25	30	90	6,19 ± 2,00
17.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	25	30	90	6,50 ± 2,00

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
18.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	25	30	90	$6,80 \pm 2,00$
19.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	25	30	90	$7,11 \pm 2,00$

4.2.23. Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 6,5 мм;
- длина: 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

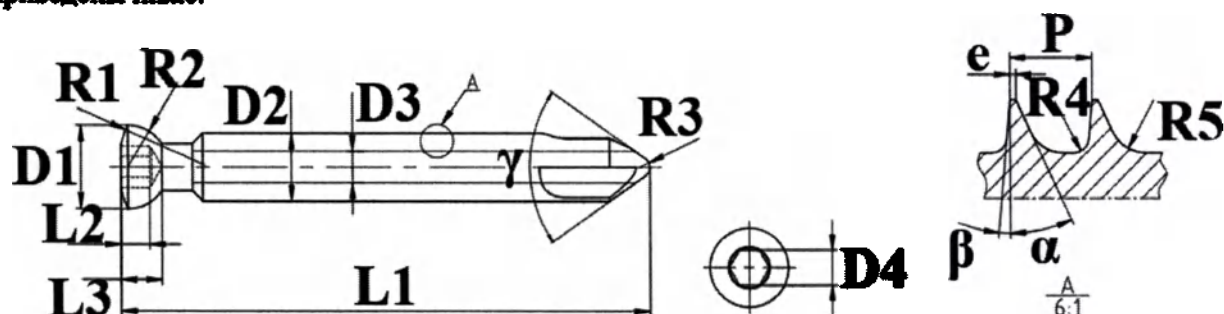


Таблица 4.2.23а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	$40,00 \pm 0,30$	$2,80 \pm 0,10$	$4,00 \pm 0,10$
2.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	$45,00 \pm 0,30$	$2,80 \pm 0,10$	$4,00 \pm 0,10$
3.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	$50,00 \pm 0,30$	$2,80 \pm 0,10$	$4,00 \pm 0,10$
4.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	$55,00 \pm 0,30$	$2,80 \pm 0,10$	$4,00 \pm 0,10$
5.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	$60,00 \pm 0,30$	$2,80 \pm 0,10$	$4,00 \pm 0,10$
6.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	$65,00 \pm 0,30$	$2,80 \pm 0,10$	$4,00 \pm 0,10$
7.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	$70,00 \pm 0,30$	$2,80 \pm 0,10$	$4,00 \pm 0,10$
8.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	$75,00 \pm 0,30$	$2,80 \pm 0,10$	$4,00 \pm 0,10$
9.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	$80,00 \pm 0,30$	$2,80 \pm 0,10$	$4,00 \pm 0,10$
10.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	$85,00 \pm 0,30$	$2,80 \pm 0,10$	$4,00 \pm 0,10$
11.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	$90,00 \pm 0,30$	$2,80 \pm 0,10$	$4,00 \pm 0,10$
12.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	$95,00 \pm 0,30$	$2,80 \pm 0,10$	$4,00 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
13.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
14.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	105,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
15.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	110,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
16.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	115,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
17.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	120,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10

Таблица 4.2.436 – Характеристики изделия

№	Наименование	P, мм	e, мм	D1, мм
1.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	2,75	0,20	7,95 ± 0,20
2.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	2,75	0,20	7,95 ± 0,20
3.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	2,75	0,20	7,95 ± 0,20
4.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	2,75	0,20	7,95 ± 0,20
5.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	2,75	0,20	7,95 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	2,75	0,20	7,95 ± 0,20
7.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	2,75	0,20	7,95 ± 0,20
8.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	2,75	0,20	7,95 ± 0,20
9.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	2,75	0,20	7,95 ± 0,20
10.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	2,75	0,20	7,95 ± 0,20
11.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	2,75	0,20	7,95 ± 0,20
12.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	2,75	0,20	7,95 ± 0,20
13.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	2,75	0,20	7,95 ± 0,20
14.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	2,75	0,20	7,95 ± 0,20
15.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	2,75	0,20	7,95 ± 0,20
16.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	2,75	0,20	7,95 ± 0,20
17.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	2,75	0,20	7,95 ± 0,20

Таблица 4.2.23в – Характеристики изделия

№	Наименование	D2, мм	D3, мм	D4, мм
1.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10

№	Наименование	D2, мм	D3, мм	D4, мм
2.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
3.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
4.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
5.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
6.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
7.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
8.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
9.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
10.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
11.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
12.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
13.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
14.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
15.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
16.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10
17.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20	3,50 ± 0,10

Таблица 4.2.23г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	8,50	4,00	1,00
2.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	8,50	4,00	1,00
3.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	8,50	4,00	1,00
4.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	8,50	4,00	1,00
5.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	8,50	4,00	1,00
6.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	8,50	4,00	1,00
7.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	8,50	4,00	1,00
8.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	8,50	4,00	1,00
9.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	8,50	4,00	1,00

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
10.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	8,50	4,00	1,00
11.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	8,50	4,00	1,00
12.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	8,50	4,00	1,00
13.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	8,50	4,00	1,00
14.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	8,50	4,00	1,00
15.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	8,50	4,00	1,00
16.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	8,50	4,00	1,00
17.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	8,50	4,00	1,00

Таблица 4.2.23д – Характеристики изделия

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	α (°)
1.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	0,50	1,20	25
2.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	0,50	1,20	25
3.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	0,50	1,20	25
4.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	0,50	1,20	25
5.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	0,50	1,20	25
6.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	0,50	1,20	25
7.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	0,50	1,20	25
8.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	0,50	1,20	25
9.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	0,50	1,20	25
10.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	0,50	1,20	25
11.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	0,50	1,20	25
12.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	0,50	1,20	25
13.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	0,50	1,20	25
14.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	0,50	1,20	25
15.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	0,50	1,20	25
16.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	0,50	1,20	25
17.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	0,50	1,20	25

Таблица 4.2.23е – Характеристики изделия

№	Наименование	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	5	70	$2,40 \pm 0,50$
2.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	5	70	$2,73 \pm 0,50$
3.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	5	70	$3,07 \pm 1,00$
4.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	5	70	$3,41 \pm 1,00$
5.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	5	70	$3,74 \pm 1,00$
6.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	5	70	$4,08 \pm 1,00$
7.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	5	70	$4,42 \pm 1,00$
8.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	5	70	$4,75 \pm 1,00$
9.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	5	70	$5,09 \pm 2,00$
10.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	5	70	$5,43 \pm 2,00$
11.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	5	70	$5,77 \pm 2,00$
12.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	5	70	$6,10 \pm 2,00$
13.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	5	70	$6,44 \pm 2,00$
14.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	5	70	$6,78 \pm 2,00$
15.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	5	70	$7,11 \pm 2,00$
16.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	5	70	$7,45 \pm 2,00$
17.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	5	70	$7,79 \pm 2,00$

4.2.24. Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт спонгиозный, с неполной резьбой изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 6,5 мм;
- длина: 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

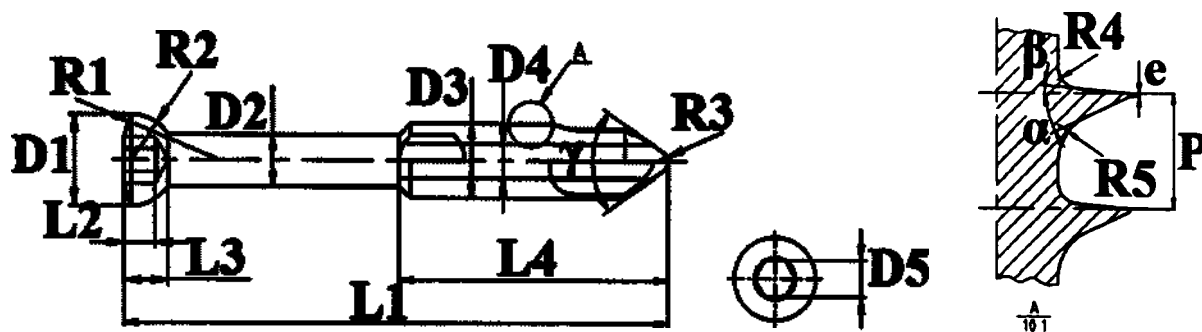


Таблица 4.2.24а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм
1.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	20,00 ± 0,50
2.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	45,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	20,00 ± 0,50
3.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	20,00 ± 0,50
4.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	25,00 ± 0,50
5.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	25,00 ± 0,50
6.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	65,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	25,00 ± 0,50
7.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	30,00 ± 0,50
8.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	75,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	30,00 ± 0,50
9.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	30,00 ± 0,50
10.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	40,00 ± 0,50
11.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	40,00 ± 0,50
12.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	40,00 ± 0,50
13.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	40,00 ± 0,50
14.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	105,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	50,00 ± 0,50
15.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	110,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	50,00 ± 0,50
16.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	115,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	50,00 ± 0,50
17.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	120,00 ± 0,30	2,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10	50,00 ± 0,50

Таблица 4.2.24б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
1.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
2.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм
3.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
4.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
5.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
7.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
8.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
9.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
10.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
11.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
12.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
13.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
14.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
15.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
16.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20
17.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	7,95 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,00 ± 0,20

Таблица 4.2.24в – Характеристики изделия

№	Наименование	D5, мм	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	3,50 ± 0,10	8,50	4,00	1,00
2.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	3,50 ± 0,10	8,50	4,00	1,00
3.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	3,50 ± 0,10	8,50	4,00	1,00
4.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	3,50 ± 0,10	8,50	4,00	1,00
5.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	3,50 ± 0,10	8,50	4,00	1,00
6.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	3,50 ± 0,10	8,50	4,00	1,00
7.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	3,50 ± 0,10	8,50	4,00	1,00
8.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	3,50 ± 0,10	8,50	4,00	1,00
9.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	3,50 ± 0,10	8,50	4,00	1,00
10.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	3,50 ± 0,10	8,50	4,00	1,00

№	Наименование	D5, мм	R1, мм	R2, мм	R3, мм
11.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	3,50 ± 0,10	8,50	4,00	1,00
12.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	3,50 ± 0,10	8,50	4,00	1,00
13.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	3,50 ± 0,10	8,50	4,00	1,00
14.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	3,50 ± 0,10	8,50	4,00	1,00
15.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	3,50 ± 0,10	8,50	4,00	1,00
16.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	3,50 ± 0,10	8,50	4,00	1,00
17.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	3,50 ± 0,10	8,50	4,00	1,00

Таблица 4.2.24г – Характеристики изделия

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	0,50	1,20	2,75	0,20
2.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	0,50	1,20	2,75	0,20
3.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	0,50	1,20	2,75	0,20
4.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	0,50	1,20	2,75	0,20
5.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	0,50	1,20	2,75	0,20
6.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	0,50	1,20	2,75	0,20
7.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	0,50	1,20	2,75	0,20
8.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	0,50	1,20	2,75	0,20
9.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	0,50	1,20	2,75	0,20
10.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	0,50	1,20	2,75	0,20
11.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	0,50	1,20	2,75	0,20
12.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	0,50	1,20	2,75	0,20
13.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	0,50	1,20	2,75	0,20
14.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	0,50	1,20	2,75	0,20
15.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	0,50	1,20	2,75	0,20
16.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	0,50	1,20	2,75	0,20
17.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	0,50	1,20	2,75	0,20

Таблица 4.2.24д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	25	5	70	$2,70 \pm 0,50$
2.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	25	5	70	$3,02 \pm 1,00$
3.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	25	5	70	$3,35 \pm 1,00$
4.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	25	5	70	$3,67 \pm 1,00$
5.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	25	5	70	$4,00 \pm 1,00$
6.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	25	5	70	$4,32 \pm 1,00$
7.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	25	5	70	$4,65 \pm 1,00$
8.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	25	5	70	$4,97 \pm 1,00$
9.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	25	5	70	$5,30 \pm 2,00$
10.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	25	5	70	$5,62 \pm 2,00$
11.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	25	5	70	$5,95 \pm 2,00$
12.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	25	5	70	$6,27 \pm 2,00$
13.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	25	5	70	$6,60 \pm 2,00$
14.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	25	5	70	$6,92 \pm 2,00$
15.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	25	5	70	$7,25 \pm 2,00$
16.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	25	5	70	$7,57 \pm 2,00$
17.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	25	5	70	$7,90 \pm 2,00$

4.2.25. Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм


Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт блокирующий MR изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 2,0 мм;

- длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

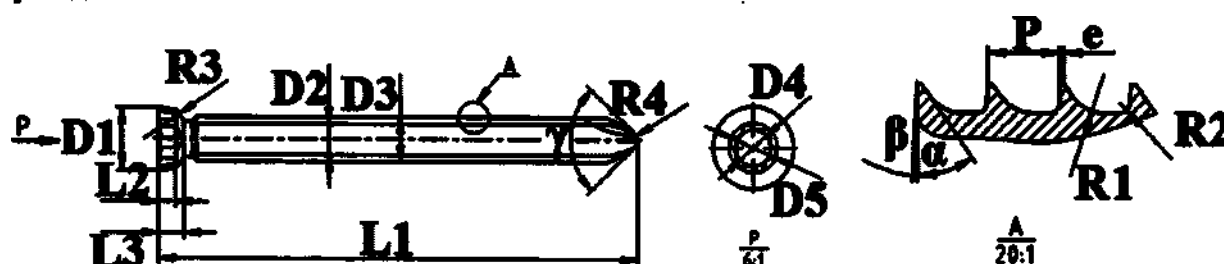

Документ компании «Ухань Майндрой Саянэнтифик Ко., Лтд.» /

Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd. Все права защищены.

Таблица 4.2.25а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	6,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,10} ₀	1,17 ± 0,10
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 7,0 мм	7,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,10} ₀	1,17 ± 0,10
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	8,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,10} ₀	1,17 ± 0,10
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 9,0 мм	9,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,10} ₀	1,17 ± 0,10
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,10} ₀	1,17 ± 0,10
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 11,0 мм	11,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,10} ₀	1,17 ± 0,10
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,10} ₀	1,17 ± 0,10
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 13,0 мм	13,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,10} ₀	1,17 ± 0,10
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,10} ₀	1,17 ± 0,10
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,10} ₀	1,17 ± 0,10
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,10} ₀	1,17 ± 0,10
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,10} ₀	1,17 ± 0,10
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,10} ₀	1,17 ± 0,10
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,10} ₀	1,17 ± 0,10
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,10} ₀	1,17 ± 0,10
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,10} ₀	1,17 ± 0,10
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,10} ₀	1,17 ± 0,10

Таблица 4.2.25б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 7,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 9,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 11,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 13,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 30,0 мм	2,90 ± 0,20	1,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20

Таблица 4.2.25в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10	0,75
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 7,0 мм	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10	0,75
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10	0,75
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 9,0 мм	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10	0,75
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10	0,75
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 11,0 мм	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10	0,75

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10	0,75
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 13,0 мм	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10	0,75
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10	0,75
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10	0,75
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10	0,75
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10	0,75
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10	0,75
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10	0,75
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10	0,75
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10	0,75
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 30,0 мм	1,26 ± 0,10	1,75 ± 0,10	0,75

Таблица 4.2.25г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	R4, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 7,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 9,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 11,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 13,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 30,0 мм	0,40	0,10	2,00	0,40

Таблица 4.2.25д – Характеристики изделия

№	Наименование	e, мм	α (°)	β (°)
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	0,05	35	3
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 7,0 мм	0,05	35	3
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	0,05	35	3
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 9,0 мм	0,05	35	3
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	0,05	35	3
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 11,0 мм	0,05	35	3
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	0,05	35	3
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 13,0 мм	0,05	35	3
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	0,05	35	3
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	0,05	35	3
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	0,05	35	3
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	0,05	35	3
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	0,05	35	3
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	0,05	35	3
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	0,05	35	3
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	0,05	35	3
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 30,0 мм	0,05	35	3

Таблица 4.2.25е – Характеристики изделия

№	Наименование	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	90	не более 0,10
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 7,0 мм	90	не более 0,10
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	90	не более 0,10
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 9,0 мм	90	не более 0,10
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	90	не более 0,10
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 11,0 мм	90	не более 0,10
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	90	не более 0,10
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 13,0 мм	90	не более 0,10
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	90	$0,10 \pm 0,05$
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	90	$0,12 \pm 0,05$
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	90	$0,13 \pm 0,05$
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	90	$0,15 \pm 0,05$
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	90	$0,17 \pm 0,05$
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	90	$0,18 \pm 0,05$
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	90	$0,20 \pm 0,05$
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	90	$0,22 \pm 0,05$
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина 30,0 мм	90	$0,23 \pm 0,05$

4.2.26. Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт блокирующий MR изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 2,4 мм;
- длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

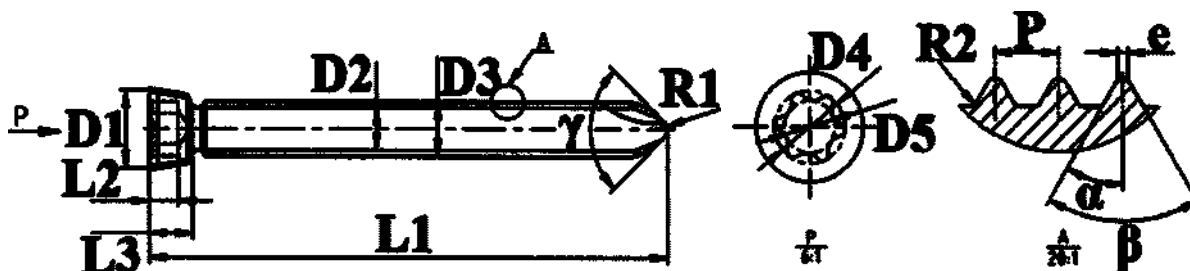


Таблица 4.2.26а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 7,0 мм	$7,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	$8,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм	$9,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	$10,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 11,0 мм	$11,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	$12,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 13,0 мм	$13,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	$14,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	$16,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,90 ± 0,10
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,90 ± 0,10
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,90 ± 0,10
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,90 ± 0,10
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,90 ± 0,10
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,90 ± 0,10
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,90 ± 0,10

Таблица 4.2.265 – Характеристики изделия

№	Наименование	P, мм	e, мм	β (°)
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	0,60	0,10	60
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 7,0 мм	0,60	0,10	60
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	0,60	0,10	60
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм	0,60	0,10	60
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	0,60	0,10	60
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 11,0 мм	0,60	0,10	60
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	0,60	0,10	60
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 13,0 мм	0,60	0,10	60
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	0,60	0,10	60
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	0,60	0,10	60
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	0,60	0,10	60
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	0,60	0,10	60
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	0,60	0,10	60
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	0,60	0,10	60
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	0,60	0,10	60
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	0,60	0,10	60
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	0,60	0,10	60

Таблица 4.2.26a – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 7,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 11,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 13,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	3,50 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20

Таблица 4.2.26г – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	γ (°)
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	90
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 7,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	90
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	90
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	90
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	90
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 11,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	90
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	90
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 13,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	90
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	90
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	90
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	90
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	90
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	90
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	90
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	90
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	90
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	90

Таблица 4.2.26д – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	α (°)
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	0,50	0,05	30
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 7,0 мм	0,50	0,05	30
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	0,50	0,05	30
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм	0,50	0,05	30
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	0,50	0,05	30
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 11,0 мм	0,50	0,05	30
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	0,50	0,05	30
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 13,0 мм	0,50	0,05	30
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	0,50	0,05	30
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	0,50	0,05	30
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	0,50	0,05	30
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	0,50	0,05	30
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	0,50	0,05	30
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	0,50	0,05	30
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	0,50	0,05	30
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	0,50	0,05	30
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	0,50	0,05	30

Таблица 4.2.26е – Характеристики изделия

№	Наименование	Масса, г
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	не более 0,10
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 7,0 мм	не более 0,10
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	$0,10 \pm 0,05$
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм	$0,12 \pm 0,05$
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	$0,13 \pm 0,05$
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 11,0 мм	$0,15 \pm 0,05$
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	$0,17 \pm 0,05$
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 13,0 мм	$0,18 \pm 0,05$
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	$0,20 \pm 0,05$

10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	$0,23 \pm 0,05$
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	$0,26 \pm 0,05$
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	$0,29 \pm 0,05$
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	$0,32 \pm 0,10$
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	$0,35 \pm 0,10$
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	$0,38 \pm 0,10$
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	$0,41 \pm 0,10$
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	$0,45 \pm 0,10$

4.2.27. Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт блокирующий MR изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 2,7 мм;
- длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 55,0; 60,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

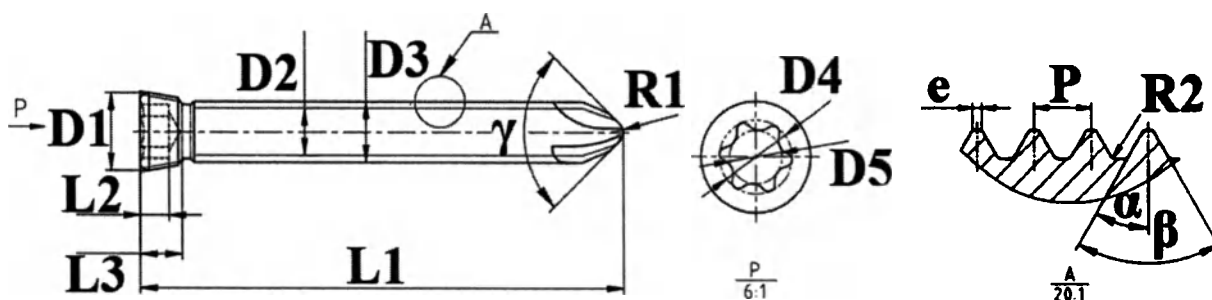


Таблица 4.2.27а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 7,0 мм	$7,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	$8,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 9,0 мм	$9,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	$10,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 11,0 мм	$11,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	$12,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 13,0 мм	$13,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	$14,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	$16,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	$22,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	$24,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	$26,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	$28,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	$30,00 \pm 0,20$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	$32,00 \pm 0,30$	$1,30^{+0,10}_0$	$1,90 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	1,90 ± 0,10
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	1,90 ± 0,10
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	1,90 ± 0,10
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	1,90 ± 0,10
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	1,90 ± 0,10
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	1,90 ± 0,10
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	1,90 ± 0,10
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	1,90 ± 0,10
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	1,90 ± 0,10
28.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	1,90 ± 0,10
29.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	1,90 ± 0,10

Таблица 4.2.276 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 7,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 9,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 11,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 13,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
28.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
29.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	3,50 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20

Таблица 4.2.27в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 7,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 9,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 11,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 13,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
28.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60
29.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60

Таблица 4.2.27г – Характеристики изделия

№	Наименование	e, мм	R1, мм	R2, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	0,10	0,50	0,05
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 7,0 мм	0,10	0,50	0,05
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	0,10	0,50	0,05
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 9,0 мм	0,10	0,50	0,05
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	0,10	0,50	0,05
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 11,0 мм	0,10	0,50	0,05
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	0,10	0,50	0,05
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 13,0 мм	0,10	0,50	0,05
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	0,10	0,50	0,05
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	0,10	0,50	0,05
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	0,10	0,50	0,05
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	0,10	0,50	0,05
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	0,10	0,50	0,05
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	0,10	0,50	0,05
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	0,10	0,50	0,05
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	0,10	0,50	0,05
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	0,10	0,50	0,05
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	0,10	0,50	0,05
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	0,10	0,50	0,05
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	0,10	0,50	0,05
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	0,10	0,50	0,05
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	0,10	0,50	0,05
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	0,10	0,50	0,05
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	0,10	0,50	0,05
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	0,10	0,50	0,05

№	Наименование	e, мм	R1, мм	R2, мм
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	0,10	0,50	0,05
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	0,10	0,50	0,05
28.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	0,10	0,50	0,05
29.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	0,10	0,50	0,05

Таблица 4.2.27д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	30	60	90	0,10 ± 0,05
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 7,0 мм	30	60	90	0,12 ± 0,05
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	30	60	90	0,14 ± 0,05
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 9,0 мм	30	60	90	0,16 ± 0,05
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	30	60	90	0,17 ± 0,05
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 11,0 мм	30	60	90	0,19 ± 0,05
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	30	60	90	0,21 ± 0,05
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 13,0 мм	30	60	90	0,23 ± 0,05
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	30	60	90	0,25 ± 0,05
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	30	60	90	0,29 ± 0,05
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	30	60	90	0,33 ± 0,10
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	30	60	90	0,37 ± 0,10
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	30	60	90	0,41 ± 0,10
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	30	60	90	0,45 ± 0,10
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	30	60	90	0,49 ± 0,10
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	30	60	90	0,53 ± 0,20
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	30	60	90	0,56 ± 0,20
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	30	60	90	0,60 ± 0,20
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	30	60	90	0,64 ± 0,20
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	30	60	90	0,68 ± 0,20
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	30	60	90	0,72 ± 0,20
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	30	60	90	0,76 ± 0,20
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	30	60	90	0,80 ± 0,20
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	30	60	90	0,84 ± 0,20
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	30	60	90	0,88 ± 0,20
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	30	60	90	0,92 ± 0,20
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	30	60	90	0,95 ± 0,20
28.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	30	60	90	1,05 ± 0,50
29.	Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	30	60	90	1,15 ± 0,50

4.2.28. Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт блокирующий MR изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 3,5 мм;
- длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 35,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 45,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 55,0; 56,0; 58,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

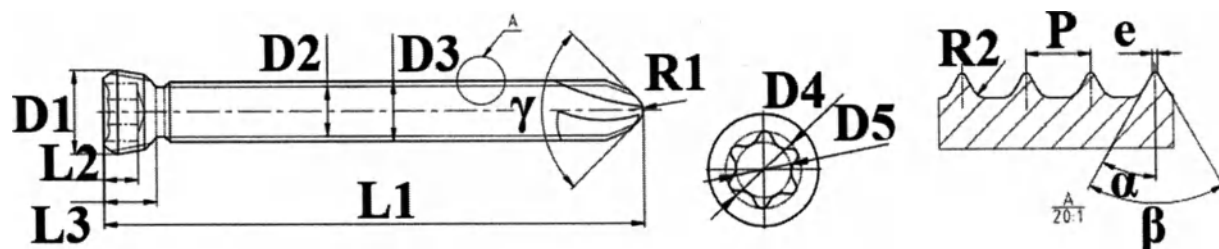


Таблица 4.2.28а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 35,0 мм	35,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 45,0 мм	45,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 52,0 мм	52,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 54,0 мм	54,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 56,0 мм	56,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
28.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 58,0 мм	58,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
29.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
30.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 65,0 мм	65,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
31.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
32.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 75,0 мм	75,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
33.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
34.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
35.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10
36.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,66 ± 0,10

Таблица 4.2.28б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 35,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 45,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 52,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 54,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 55,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 56,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
28.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 58,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
29.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 60,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
30.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 65,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
31.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 70,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
32.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 75,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
33.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 80,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
34.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 85,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
35.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 90,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20
36.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 95,0 мм	4,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	3,50 ± 0,20

Таблица 4.2.28в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 35,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 45,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 52,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 54,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 55,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 56,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
28.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 58,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
29.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 60,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
30.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 65,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
31.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 70,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
32.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 75,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
33.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 80,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
34.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 85,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
35.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 90,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80
36.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 95,0 мм	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10	0,80

Таблица 4.2.28г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	e, мм	α (°)
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 35,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 45,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 52,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 54,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 55,0 мм	0,80	0,16	0,10	30

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	e, мм	α (°)
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 56,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
28.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 58,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
29.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 60,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
30.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 65,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
31.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 70,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
32.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 75,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
33.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 80,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
34.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 85,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
35.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 90,0 мм	0,80	0,16	0,10	30
36.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 95,0 мм	0,80	0,16	0,10	30

Таблицы 4.2.28д – Характеристики изделия

№	Наименование	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	60	90	0,36 ± 0,10
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	60	90	0,42 ± 0,10
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	60	90	0,48 ± 0,10
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	60	90	0,55 ± 0,20
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	60	90	0,61 ± 0,20
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	60	90	0,68 ± 0,20
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	60	90	0,74 ± 0,20
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	60	90	0,81 ± 0,20
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	60	90	0,87 ± 0,20
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	60	90	0,94 ± 0,20
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	60	90	1,00 ± 0,50
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	60	90	1,06 ± 0,50
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	60	90	1,13 ± 0,50
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 35,0 мм	60	90	1,16 ± 0,50
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	60	90	1,19 ± 0,50
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	60	90	1,26 ± 0,50
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	60	90	1,32 ± 0,50
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	60	90	1,39 ± 0,50
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	60	90	1,45 ± 0,50
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 45,0 мм	60	90	1,48 ± 0,50
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	60	90	1,52 ± 0,50
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	60	90	1,58 ± 0,50
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	60	90	1,65 ± 0,50
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 52,0 мм	60	90	1,71 ± 0,50
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 54,0 мм	60	90	1,77 ± 0,50
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 55,0 мм	60	90	1,81 ± 0,50
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 56,0 мм	60	90	1,84 ± 0,50
28.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 58,0 мм	60	90	1,90 ± 0,50
29.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 60,0 мм	60	90	1,97 ± 0,50
30.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 65,0 мм	60	90	2,13 ± 0,50
31.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 70,0 мм	60	90	2,29 ± 0,50
32.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 75,0 мм	60	90	2,45 ± 0,50
33.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 80,0 мм	60	90	2,61 ± 0,50
34.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 85,0 мм	60	90	2,77 ± 0,50
35.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 90,0 мм	60	90	2,94 ± 0,50
36.	Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина 95,0 мм	60	90	3,10 ± 1,00

4.2.29. Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт блокирующий MR изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 5,0 мм;
- длина: 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

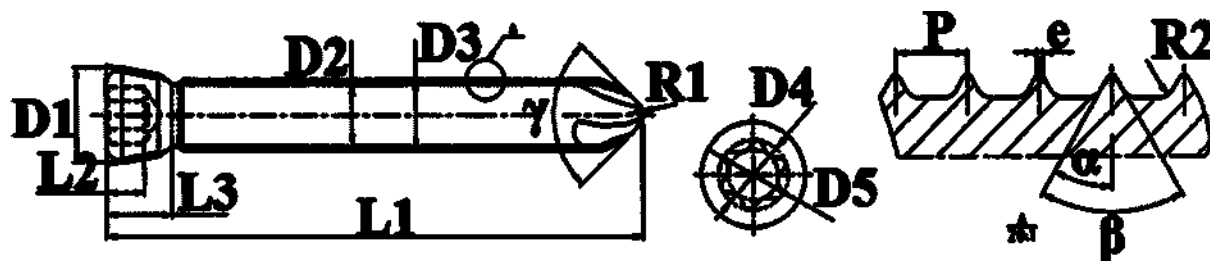


Таблица 4.2.29а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,20	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,20	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 65,0 мм	65,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 75,0 мм	75,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10

Таблица 4.2.29б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 14,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 16,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 18,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 20,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 22,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 24,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 26,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 28,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 30,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 32,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 34,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 36,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 38,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 40,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 42,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 44,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 46,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 48,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 50,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 55,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 60,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 65,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 70,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 75,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 80,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 85,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 90,0 мм	6,80 ± 0,20	4,40 ± 0,20	5,00 ± 0,20

Таблица 4.2.29в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 14,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 16,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 18,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 20,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 22,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 24,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 26,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 28,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 30,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 32,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 34,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 36,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 38,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 40,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 42,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 44,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 46,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 48,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 50,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 55,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 60,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 65,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 70,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 75,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 80,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 85,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 90,0 мм	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10	1,00

Таблица 4.2.29г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	e, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 14,0 мм	1,20	0,20	0,10
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 16,0 мм	1,20	0,20	0,10
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 18,0 мм	1,20	0,20	0,10
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 20,0 мм	1,20	0,20	0,10
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 22,0 мм	1,20	0,20	0,10
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 24,0 мм	1,20	0,20	0,10
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 26,0 мм	1,20	0,20	0,10
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 28,0 мм	1,20	0,20	0,10
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 30,0 мм	1,20	0,20	0,10
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 32,0 мм	1,20	0,20	0,10
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 34,0 мм	1,20	0,20	0,10
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 36,0 мм	1,20	0,20	0,10
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 38,0 мм	1,20	0,20	0,10
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 40,0 мм	1,20	0,20	0,10
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 42,0 мм	1,20	0,20	0,10
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 44,0 мм	1,20	0,20	0,10
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 46,0 мм	1,20	0,20	0,10
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 48,0 мм	1,20	0,20	0,10
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 50,0 мм	1,20	0,20	0,10
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 55,0 мм	1,20	0,20	0,10
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 60,0 мм	1,20	0,20	0,10
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 65,0 мм	1,20	0,20	0,10
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 70,0 мм	1,20	0,20	0,10
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 75,0 мм	1,20	0,20	0,10
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 80,0 мм	1,20	0,20	0,10
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 85,0 мм	1,20	0,20	0,10
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 90,0 мм	1,20	0,20	0,10

Таблица 4.2.29д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 14,0 мм	30	60	90	0,86 ± 0,20
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 16,0 мм	30	60	90	1,01 ± 0,50
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 18,0 мм	30	60	90	1,16 ± 0,50
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 20,0 мм	30	60	90	1,30 ± 0,50
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 22,0 мм	30	60	90	1,45 ± 0,50
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 24,0 мм	30	60	90	1,59 ± 0,50
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 26,0 мм	30	60	90	1,74 ± 0,50
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 28,0 мм	30	60	90	1,89 ± 0,50
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 30,0 мм	30	60	90	2,03 ± 0,50
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 32,0 мм	30	60	90	2,18 ± 0,50
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 34,0 мм	30	60	90	2,32 ± 0,50
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 36,0 мм	30	60	90	2,47 ± 0,50

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 38,0 мм	30	60	90	$2,62 \pm 0,50$
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 40,0 мм	30	60	90	$2,76 \pm 0,50$
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 42,0 мм	30	60	90	$2,91 \pm 0,50$
16.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 44,0 мм	30	60	90	$3,05 \pm 1,00$
17.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 46,0 мм	30	60	90	$3,20 \pm 1,00$
18.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 48,0 мм	30	60	90	$3,35 \pm 1,00$
19.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 50,0 мм	30	60	90	$3,49 \pm 1,00$
20.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 55,0 мм	30	60	90	$3,86 \pm 1,00$
21.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 60,0 мм	30	60	90	$4,22 \pm 1,00$
22.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 65,0 мм	30	60	90	$4,59 \pm 1,00$
23.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 70,0 мм	30	60	90	$4,95 \pm 1,00$
24.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 75,0 мм	30	60	90	$5,32 \pm 2,00$
25.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 80,0 мм	30	60	90	$5,68 \pm 2,00$
26.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 85,0 мм	30	60	90	$6,05 \pm 2,00$
27.	Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина 90,0 мм	30	60	90	$6,41 \pm 2,00$

4.2.30. Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 2,4 мм;
- длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

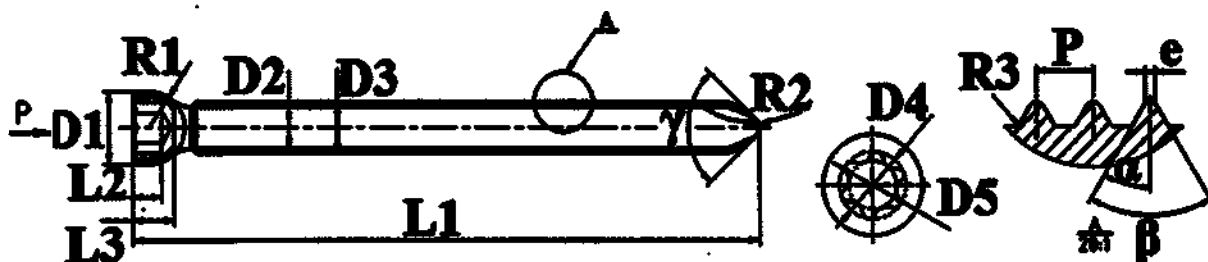


Таблица 4.2.30а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$1,40^{0}_{-0,10}$	$2,00 \pm 0,10$
2.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	$8,00 \pm 0,20$	$1,40^{0}_{-0,10}$	$2,00 \pm 0,10$
3.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	$10,00 \pm 0,20$	$1,40^{0}_{-0,10}$	$2,00 \pm 0,10$
4.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	$12,00 \pm 0,20$	$1,40^{0}_{-0,10}$	$2,00 \pm 0,10$
5.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	$14,00 \pm 0,20$	$1,40^{0}_{-0,10}$	$2,00 \pm 0,10$
6.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	$16,00 \pm 0,20$	$1,40^{0}_{-0,10}$	$2,00 \pm 0,10$
7.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,20$	$1,40^{0}_{-0,10}$	$2,00 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
8.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
9.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
10.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
11.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
12.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
13.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10

Таблица 4.2.30б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
2.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
3.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
4.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
5.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
6.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
7.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
8.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
9.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
10.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
11.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
12.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20
13.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	3,40 ± 0,20	1,90 ± 0,20	2,40 ± 0,20

Таблица 4.2.30в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10
2.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10
3.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10
4.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм	e, мм
5.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10
6.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10
7.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10
8.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10
9.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10
10.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10
11.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10
12.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10
13.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60	0,10

Таблица 4.2.30г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	1,70	0,50	0,05
2.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	1,70	0,50	0,05
3.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	1,70	0,50	0,05
4.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	1,70	0,50	0,05
5.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	1,70	0,50	0,05
6.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	1,70	0,50	0,05
7.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	1,70	0,50	0,05
8.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	1,70	0,50	0,05
9.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	1,70	0,50	0,05
10.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	1,70	0,50	0,05
11.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	1,70	0,50	0,05
12.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	1,70	0,50	0,05
13.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	1,70	0,50	0,05

Таблица 4.2.30д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	30	60	90	0,12 ± 0,05

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
2.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	30	60	90	$0,14 \pm 0,05$
3.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	30	60	90	$0,17 \pm 0,05$
4.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	30	60	90	$0,20 \pm 0,05$
5.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	30	60	90	$0,22 \pm 0,05$
6.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	30	60	90	$0,25 \pm 0,05$
7.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	30	60	90	$0,28 \pm 0,05$
8.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	30	60	90	$0,31 \pm 0,10$
9.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	30	60	90	$0,33 \pm 0,10$
10.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	30	60	90	$0,36 \pm 0,10$
11.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	30	60	90	$0,39 \pm 0,10$
12.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	30	60	90	$0,41 \pm 0,10$
13.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	30	60	90	$0,44 \pm 0,10$

4.2.31. Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 2,7 мм;
- длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

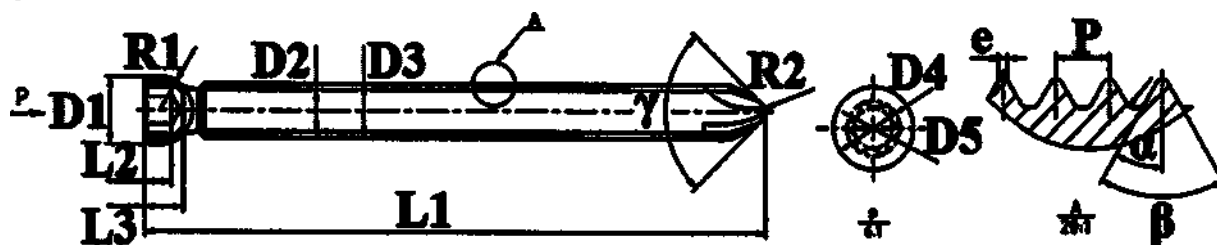


Таблица 4.2.31а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	$10,00 \pm 0,20$	$1,40_{-0,10}^0$	$2,00 \pm 0,10$
2.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	$12,00 \pm 0,20$	$1,40_{-0,10}^0$	$2,00 \pm 0,10$
3.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	$14,00 \pm 0,20$	$1,40_{-0,10}^0$	$2,00 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
4.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,20	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
5.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
6.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
7.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
8.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
9.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
10.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
11.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
12.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
13.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
14.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
15.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
16.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
17.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
18.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
19.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
20.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
21.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
22.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 52,0 мм	52,00 ± 0,30	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
23.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 54,0 мм	54,00 ± 0,30	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
24.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 56,0 мм	56,00 ± 0,30	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
25.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 58,0 мм	58,00 ± 0,30	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10
26.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	1,40 ⁰ _{-0,10}	2,00 ± 0,10

Таблица 4.2.316 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
2.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
3.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
4.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
5.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
6.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
7.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
8.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
9.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
10.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
11.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
12.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
13.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
14.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
15.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
16.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
17.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
18.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
19.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
20.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
21.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
22.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 52,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
23.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 54,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
24.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 56,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
25.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 58,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20
26.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	3,40 ± 0,20	2,10 ± 0,20	2,70 ± 0,20

Таблица 4.2.31в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	0,60

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
2.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
3.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
4.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
5.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
6.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
7.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
8.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
9.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
10.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
11.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
12.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
13.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
14.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
15.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
16.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
17.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
18.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
19.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
20.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
21.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
22.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 52,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
23.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 54,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
24.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 56,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
25.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 58,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60
26.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	0,60

Таблица 4.2.31г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	e, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
2.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
3.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
4.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
5.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
6.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
7.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
8.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
9.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
10.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
11.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
12.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
13.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
14.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
15.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
16.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
17.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
18.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
19.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
20.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
21.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
22.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 52,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
23.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 54,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
24.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 56,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
25.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 58,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10
26.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	1,70	0,50	0,05	0,10

Таблица 4.2.31д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	30	60	90	$0,14 \pm 0,05$
2.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	30	60	90	$0,18 \pm 0,05$
3.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	30	60	90	$0,22 \pm 0,05$
4.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	30	60	90	$0,26 \pm 0,05$
5.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	30	60	90	$0,30 \pm 0,10$
6.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	30	60	90	$0,34 \pm 0,10$
7.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	30	60	90	$0,38 \pm 0,10$
8.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	30	60	90	$0,42 \pm 0,10$
9.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	30	60	90	$0,46 \pm 0,10$
10.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	30	60	90	$0,50 \pm 0,20$
11.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	30	60	90	$0,54 \pm 0,20$
12.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	30	60	90	$0,58 \pm 0,20$
13.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	30	60	90	$0,62 \pm 0,20$
14.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	30	60	90	$0,66 \pm 0,20$
15.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	30	60	90	$0,70 \pm 0,20$
16.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	30	60	90	$0,74 \pm 0,20$
17.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	30	60	90	$0,78 \pm 0,20$
18.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	30	60	90	$0,82 \pm 0,20$
19.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	30	60	90	$0,86 \pm 0,20$
20.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	30	60	90	$0,90 \pm 0,20$
21.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	30	60	90	$0,95 \pm 0,20$
22.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 52,0 мм	30	60	90	$0,99 \pm 0,20$
23.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 54,0 мм	30	60	90	$1,03 \pm 0,50$
24.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 56,0 мм	30	60	90	$1,07 \pm 0,50$
25.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 58,0 мм	30	60	90	$1,11 \pm 0,50$
26.	Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	30	60	90	$1,15 \pm 0,50$

4.2.32. Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт блокирующий, канюлированный MR изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 6,5 мм;
- длина: 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

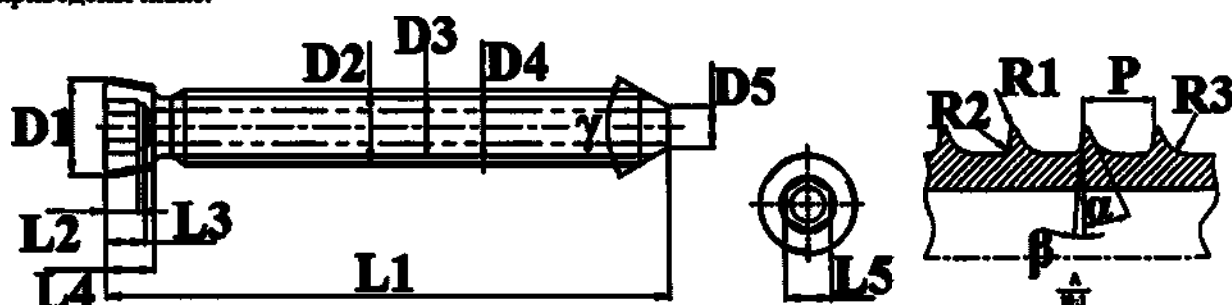


Таблица 4.2.32а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
2.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	65,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
3.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
4.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	75,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
5.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
6.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
7.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
8.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
9.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
10.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	105,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
11.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	110,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
12.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	115,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
13.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	120,00 ± 0,30	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
14.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	125,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10
15.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	130,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10	3,50 ± 0,10

Таблица 4.2.32б – Характеристики изделия

№	Наименование	L4, мм	L5, мм	P, мм
1.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10	1,80
2.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10	1,80
3.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10	1,80
4.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10	1,80
5.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10	1,80
6.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10	1,80
7.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10	1,80
8.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10	1,80
9.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10	1,80
10.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10	1,80
11.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10	1,80
12.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10	1,80
13.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10	1,80
14.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10	1,80
15.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	4,30 ± 0,10	4,00 ± 0,10	1,80

Таблица 4.2.32в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20
2.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20
3.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20
4.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20
5.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20
6.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20
7.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20
8.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20
9.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
10.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20
11.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20
12.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20
13.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20
14.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20
15.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	8,40 ± 0,20	6,50 ± 0,20	5,10 ± 0,20

Таблица 4.2.32г – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	α (°)
1.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20	35
2.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20	35
3.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20	35
4.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20	35
5.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20	35
6.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20	35
7.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20	35
8.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20	35
9.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20	35
10.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20	35
11.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20	35
12.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20	35
13.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20	35
14.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20	35
15.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	2,90 ± 0,20	3,60 ± 0,20	35

Таблица 4.2.32д – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	0,05	0,20	0,80
2.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	0,05	0,20	0,80

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
3.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	0,05	0,20	0,80
4.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	0,05	0,20	0,80
5.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	0,05	0,20	0,80
6.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	0,05	0,20	0,80
7.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	0,05	0,20	0,80
8.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	0,05	0,20	0,80
9.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	0,05	0,20	0,80
10.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	0,05	0,20	0,80
11.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	0,05	0,20	0,80
12.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	0,05	0,20	0,80
13.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	0,05	0,20	0,80
14.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	0,05	0,20	0,80
15.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	0,05	0,20	0,80

Таблица 4.2.32е – Характеристики изделия

№	Наименование	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	3	60	4,29 ± 1,00
2.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	3	60	4,66 ± 1,00
3.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	3	60	5,03 ± 2,00
4.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	3	60	5,39 ± 2,00
5.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	3	60	5,76 ± 2,00
6.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	3	60	6,13 ± 2,00
7.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	3	60	6,50 ± 2,00
8.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	3	60	6,87 ± 2,00
9.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	3	60	7,24 ± 2,00
10.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	3	60	7,61 ± 2,00
11.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	3	60	7,98 ± 2,00
12.	Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	3	60	8,34 ± 2,00

№	Наименование	β (°)	γ (°)	Масса, г
13.	Винт блокирующий, каниюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	3	60	$8,71 \pm 2,00$
14.	Винт блокирующий, каниюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	3	60	$9,08 \pm 2,00$
15.	Винт блокирующий, каниюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	3	60	$9,45 \pm 2,00$

4.2.33. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт самонарезающий, кортикальный MR изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 2,0 мм;
- длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

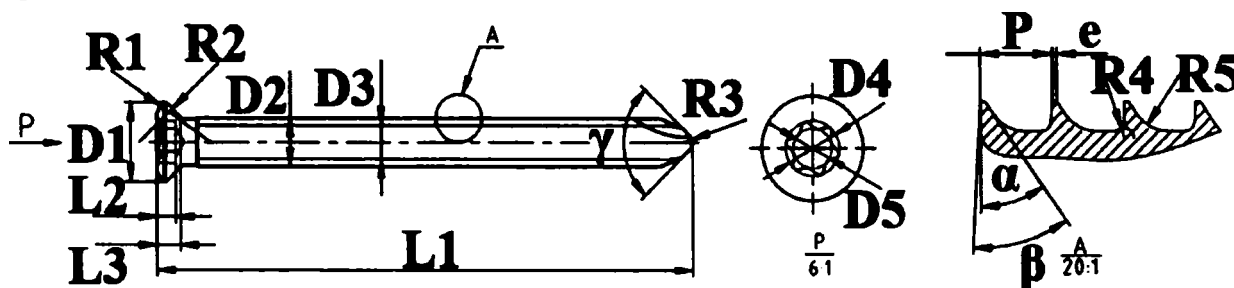


Таблица 4.2.33а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$0,80^{+0,10}_0$	$1,00 \pm 0,10$
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 7,0 мм	$7,00 \pm 0,20$	$0,80^{+0,10}_0$	$1,00 \pm 0,10$
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	$8,00 \pm 0,20$	$0,80^{+0,10}_0$	$1,00 \pm 0,10$
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 9,0 мм	$9,00 \pm 0,20$	$0,80^{+0,10}_0$	$1,00 \pm 0,10$
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	$10,00 \pm 0,20$	$0,80^{+0,10}_0$	$1,00 \pm 0,10$
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 11,0 мм	$11,00 \pm 0,20$	$0,80^{+0,10}_0$	$1,00 \pm 0,10$
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	$12,00 \pm 0,20$	$0,80^{+0,10}_0$	$1,00 \pm 0,10$
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 13,0 мм	$13,00 \pm 0,20$	$0,80^{+0,10}_0$	$1,00 \pm 0,10$
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	$14,00 \pm 0,20$	$0,80^{+0,10}_0$	$1,00 \pm 0,10$
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	$16,00 \pm 0,20$	$0,80^{+0,10}_0$	$1,00 \pm 0,10$
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,20$	$0,80^{+0,10}_0$	$1,00 \pm 0,10$
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,20$	$0,80^{+0,10}_0$	$1,00 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,10} ₀	1,00 ± 0,10
14.	Винт самонарезающий кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,10} ₀	1,00 ± 0,10
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,10} ₀	1,00 ± 0,10
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,10} ₀	1,00 ± 0,10
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	0,80 ^{+0,10} ₀	1,00 ± 0,10
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	0,80 ^{+0,10} ₀	1,00 ± 0,10
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	0,80 ^{+0,10} ₀	1,00 ± 0,10
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	0,80 ^{+0,10} ₀	1,00 ± 0,10
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	0,80 ^{+0,10} ₀	1,00 ± 0,10
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	0,80 ^{+0,10} ₀	1,00 ± 0,10

Таблица 4.2.336 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 7,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 9,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 11,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 13,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
14.	Винт самонарезающий кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 30,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 32,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 34,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 36,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 38,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 40,0 мм	3,30 ± 0,20	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20

Таблица 4.2.33в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 7,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 9,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 11,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 13,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 30,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 32,0 мм	1,75 ± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 34,0 мм	1,75± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 36,0 мм	1,75± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 38,0 мм	1,75± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 40,0 мм	1,75± 0,10	1,26 ± 0,10	0,75

Таблица 4.2.33г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	2,60	2,00	0,40
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 7,0 мм	2,60	2,00	0,40
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	2,60	2,00	0,40
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 9,0 мм	2,60	2,00	0,40
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	2,60	2,00	0,40
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 11,0 мм	2,60	2,00	0,40
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	2,60	2,00	0,40
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 13,0 мм	2,60	2,00	0,40
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	2,60	2,00	0,40
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	2,60	2,00	0,40
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	2,60	2,00	0,40
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	2,60	2,00	0,40
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	2,60	2,00	0,40
14.	Винт самонарезающий кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	2,60	2,00	0,40
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	2,60	2,00	0,40
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	2,60	2,00	0,40
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 30,0 мм	2,60	2,00	0,40
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 32,0 мм	2,60	2,00	0,40
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 34,0 мм	2,60	2,00	0,40
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 36,0 мм	2,60	2,00	0,40
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 38,0 мм	2,60	2,00	0,40

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 40,0 мм	2,60	2,00	0,40

Таблица 4.2.33д – Характеристики изделия

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	e, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	0,10	0,40	0,05
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 7,0 мм	0,10	0,40	0,05
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	0,10	0,40	0,05
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 9,0 мм	0,10	0,40	0,05
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	0,10	0,40	0,05
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 11,0 мм	0,10	0,40	0,05
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	0,10	0,40	0,05
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 13,0 мм	0,10	0,40	0,05
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	0,10	0,40	0,05
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	0,10	0,40	0,05
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	0,10	0,40	0,05
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	0,10	0,40	0,05
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	0,10	0,40	0,05
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	0,10	0,40	0,05
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	0,10	0,40	0,05
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	0,10	0,40	0,05
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 30,0 мм	0,10	0,40	0,05
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 32,0 мм	0,10	0,40	0,05
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 34,0 мм	0,10	0,40	0,05
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 36,0 мм	0,10	0,40	0,05
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 38,0 мм	0,10	0,40	0,05
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 40,0 мм	0,10	0,40	0,05

Таблица 4.2.33е – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	35	38	90	не более 0,10
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 7,0 мм	35	38	90	не более 0,10
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	35	38	90	не более 0,10
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 9,0 мм	35	38	90	не более 0,10
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	35	38	90	не более 0,10
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 11,0 мм	35	38	90	$0,10 \pm 0,05$
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	35	38	90	$0,11 \pm 0,05$
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 13,0 мм	35	38	90	$0,11 \pm 0,05$
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 14,0 мм	35	38	90	$0,12 \pm 0,05$
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 16,0 мм	35	38	90	$0,14 \pm 0,05$
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 18,0 мм	35	38	90	$0,15 \pm 0,05$
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 20,0 мм	35	38	90	$0,17 \pm 0,05$
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 22,0 мм	35	38	90	$0,19 \pm 0,05$
14.	Винт самонарезающий кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 24,0 мм	35	38	90	$0,20 \pm 0,05$
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 26,0 мм	35	38	90	$0,22 \pm 0,05$
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 28,0 мм	35	38	90	$0,23 \pm 0,05$
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 30,0 мм	35	38	90	$0,25 \pm 0,05$
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 32,0 мм	35	38	90	$0,27 \pm 0,05$
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 34,0 мм	35	38	90	$0,28 \pm 0,05$
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 36,0 мм	35	38	90	$0,30 \pm 0,10$
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 38,0 мм	35	38	90	$0,31 \pm 0,10$
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина 40,0 мм	35	38	90	$0,33 \pm 0,10$

4.2.34. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт самонарезающий, кортикальный MR изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 2,4 мм;
- длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

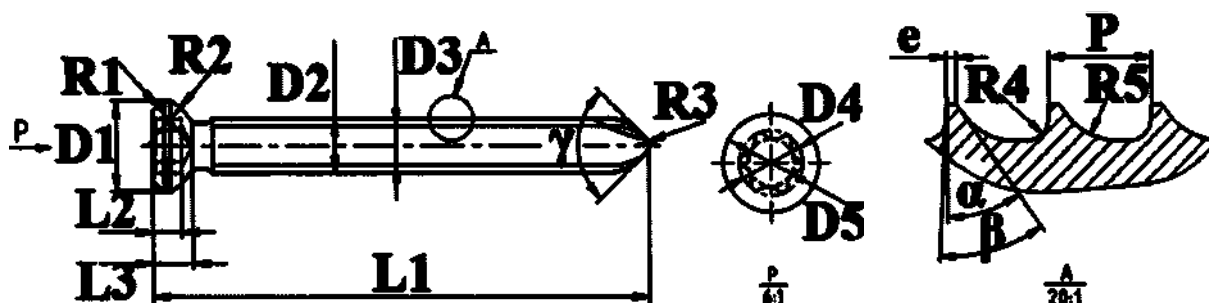


Таблица 4.2.34а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	6,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,80 ± 0,10
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 7,0 мм	7,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,80 ± 0,10
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	8,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,80 ± 0,10
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм	9,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,80 ± 0,10
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,80 ± 0,10
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 11,0 мм	11,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,80 ± 0,10
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,80 ± 0,10
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 13,0 мм	13,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,80 ± 0,10
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,80 ± 0,10
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,80 ± 0,10
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,80 ± 0,10
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,80 ± 0,10
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,80 ± 0,10
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,80 ± 0,10
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,80 ± 0,10
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,80 ± 0,10
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	1,80 ± 0,10
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	1,80 ± 0,10
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	1,80 ± 0,10

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	1,80 ± 0,10
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	1,80 ± 0,10
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	1,80 ± 0,10

Таблица 4.2.346 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	4,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,70 ± 0,20
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 7,0 мм	4,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,70 ± 0,20
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	4,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,70 ± 0,20
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм	4,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,70 ± 0,20
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	4,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,70 ± 0,20
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 11,0 мм	4,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,70 ± 0,20
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	4,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,70 ± 0,20
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 13,0 мм	4,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,70 ± 0,20
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	4,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,70 ± 0,20
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	4,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,70 ± 0,20
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	4,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,70 ± 0,20
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	4,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,70 ± 0,20
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	4,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,70 ± 0,20
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	4,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,70 ± 0,20
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	4,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,70 ± 0,20
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	4,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,70 ± 0,20
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	4,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,70 ± 0,20
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 32,0 мм	4,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,70 ± 0,20
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 34,0 мм	4,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,70 ± 0,20
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 36,0 мм	4,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,70 ± 0,20
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 38,0 мм	4,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,70 ± 0,20
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 40,0 мм	4,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	1,70 ± 0,20

Таблица 4.2.34в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 7,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 11,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 13,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 32,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 34,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 36,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 38,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 40,0 мм	2,38 ± 0,10	1,72 ± 0,10	1,00

Таблица 4.2.34г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	2,35	2,25	0,50
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 7,0 мм	2,35	2,25	0,50

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	2,35	2,25	0,50
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм	2,35	2,25	0,50
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	2,35	2,25	0,50
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 11,0 мм	2,35	2,25	0,50
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	2,35	2,25	0,50
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 13,0 мм	2,35	2,25	0,50
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	2,35	2,25	0,50
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	2,35	2,25	0,50
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	2,35	2,25	0,50
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	2,35	2,25	0,50
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	2,35	2,25	0,50
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	2,35	2,25	0,50
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	2,35	2,25	0,50
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	2,35	2,25	0,50
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	2,35	2,25	0,50
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 32,0 мм	2,35	2,25	0,50
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 34,0 мм	2,35	2,25	0,50
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 36,0 мм	2,35	2,25	0,50
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 38,0 мм	2,35	2,25	0,50
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 40,0 мм	2,35	2,25	0,50

Таблица 4.2.34д – Характеристики изделия

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	e, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	0,20	0,60	0,10
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 7,0 мм	0,20	0,60	0,10
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	0,20	0,60	0,10
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм	0,20	0,60	0,10
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	0,20	0,60	0,10

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	e, мм
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 11,0 мм	0,20	0,60	0,10
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	0,20	0,60	0,10
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 13,0 мм	0,20	0,60	0,10
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	0,20	0,60	0,10
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	0,20	0,60	0,10
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	0,20	0,60	0,10
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	0,20	0,60	0,10
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	0,20	0,60	0,10
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	0,20	0,60	0,10
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	0,20	0,60	0,10
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	0,20	0,60	0,10
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	0,20	0,60	0,10
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 32,0 мм	0,20	0,60	0,10
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 34,0 мм	0,20	0,60	0,10
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 36,0 мм	0,20	0,60	0,10
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 38,0 мм	0,20	0,60	0,10
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 40,0 мм	0,20	0,60	0,10

Таблица 4.2.34e – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 6,0 мм	35	38	90	не более 0,10
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 7,0 мм	35	38	90	$0,10 \pm 0,05$
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	35	38	90	$0,11 \pm 0,05$
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 9,0 мм	35	38	90	$0,13 \pm 0,05$
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	35	38	90	$0,14 \pm 0,05$
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 11,0 мм	35	38	90	$0,15 \pm 0,05$
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	35	38	90	$0,17 \pm 0,05$
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 13,0 мм	35	38	90	$0,18 \pm 0,05$

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	35	38	90	$0,19 \pm 0,05$
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 16,0 мм	35	38	90	$0,22 \pm 0,05$
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 18,0 мм	35	38	90	$0,24 \pm 0,05$
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 20,0 мм	35	38	90	$0,27 \pm 0,05$
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 22,0 мм	35	38	90	$0,30 \pm 0,10$
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 24,0 мм	35	38	90	$0,32 \pm 0,10$
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 26,0 мм	35	38	90	$0,35 \pm 0,10$
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 28,0 мм	35	38	90	$0,38 \pm 0,10$
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 30,0 мм	35	38	90	$0,40 \pm 0,10$
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 32,0 мм	35	38	90	$0,43 \pm 0,10$
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 34,0 мм	35	38	90	$0,45 \pm 0,10$
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 36,0 мм	35	38	90	$0,48 \pm 0,10$
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 38,0 мм	35	38	90	$0,51 \pm 0,20$
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина 40,0 мм	35	38	90	$0,53 \pm 0,20$

4.2.35. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт самонарезающий, кортикальный MR изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 2,7 мм;
- длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 45,0; 46,0; 48,0; 50,0; 55,0; 60,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

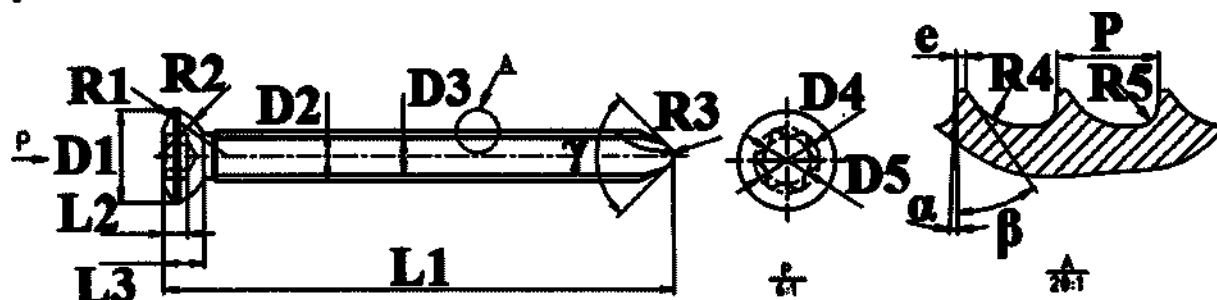


Таблица 4.2.35а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	6,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	8,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 45,0 мм	45,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	1,30 ^{+0,10} ₀	2,20 ± 0,10

Таблица 4.2.356 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 45,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	5,00 ± 0,20	2,70 ± 0,20	2,00 ± 0,20

Таблица 4.2.35а – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 45,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	$2,38 \pm 0,10$	$1,72 \pm 0,10$	1,00

Таблица 4.2.35г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	3,80	2,75	0,60
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	3,80	2,75	0,60
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	3,80	2,75	0,60
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	3,80	2,75	0,60
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	3,80	2,75	0,60
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	3,80	2,75	0,60
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	3,80	2,75	0,60
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	3,80	2,75	0,60
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	3,80	2,75	0,60
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	3,80	2,75	0,60
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	3,80	2,75	0,60
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	3,80	2,75	0,60
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	3,80	2,75	0,60
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	3,80	2,75	0,60
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	3,80	2,75	0,60
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	3,80	2,75	0,60
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	3,80	2,75	0,60
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	3,80	2,75	0,60
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	3,80	2,75	0,60
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	3,80	2,75	0,60
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 45,0 мм	3,80	2,75	0,60
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	3,80	2,75	0,60
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	3,80	2,75	0,60
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	3,80	2,75	0,60
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	3,80	2,75	0,60
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	3,80	2,75	0,60

Таблица 4.2.35д – Характеристики изделия

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	e, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	0,60	0,20	0,10
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	0,60	0,20	0,10
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	0,60	0,20	0,10
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	0,60	0,20	0,10
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	0,60	0,20	0,10
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	0,60	0,20	0,10
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	0,60	0,20	0,10
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	0,60	0,20	0,10
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	0,60	0,20	0,10
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	0,60	0,20	0,10
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	0,60	0,20	0,10
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	0,60	0,20	0,10
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	0,60	0,20	0,10
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	0,60	0,20	0,10
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	0,60	0,20	0,10
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	0,60	0,20	0,10
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	0,60	0,20	0,10
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	0,60	0,20	0,10
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	0,60	0,20	0,10
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	0,60	0,20	0,10
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 45,0 мм	0,60	0,20	0,10
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	0,60	0,20	0,10
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	0,60	0,20	0,10
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	0,60	0,20	0,10
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	0,60	0,20	0,10
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	0,60	0,20	0,10

Таблица 4.2.35е – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 6,0 мм	35	3	90	$0,16 \pm 0,05$
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 8,0 мм	35	3	90	$0,19 \pm 0,05$
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 10,0 мм	35	3	90	$0,22 \pm 0,05$
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 12,0 мм	35	3	90	$0,25 \pm 0,05$
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 14,0 мм	35	3	90	$0,28 \pm 0,05$
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 16,0 мм	35	3	90	$0,32 \pm 0,10$
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 18,0 мм	35	3	90	$0,35 \pm 0,10$
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 20,0 мм	35	3	90	$0,38 \pm 0,10$
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 22,0 мм	35	3	90	$0,41 \pm 0,10$
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 24,0 мм	35	3	90	$0,44 \pm 0,10$
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 26,0 мм	35	3	90	$0,48 \pm 0,10$
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 28,0 мм	35	3	90	$0,51 \pm 0,20$
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 30,0 мм	35	3	90	$0,54 \pm 0,20$
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 32,0 мм	35	3	90	$0,57 \pm 0,20$
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 34,0 мм	35	3	90	$0,60 \pm 0,20$
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 36,0 мм	35	3	90	$0,64 \pm 0,20$
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 38,0 мм	35	3	90	$0,67 \pm 0,20$
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 40,0 мм	35	3	90	$0,70 \pm 0,20$
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 42,0 мм	35	3	90	$0,73 \pm 0,20$
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 44,0 мм	35	3	90	$0,76 \pm 0,20$
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 45,0 мм	35	3	90	$0,80 \pm 0,20$
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 46,0 мм	35	3	90	$0,83 \pm 0,20$
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 48,0 мм	35	3	90	$0,86 \pm 0,20$
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 50,0 мм	35	3	90	$0,89 \pm 0,20$
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 55,0 мм	35	3	90	$0,92 \pm 0,20$
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина 60,0 мм	35	3	90	$0,96 \pm 0,20$

4.2.36. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт самонарезающий, кортикальный MR изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 3,5 мм;
- длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 45,0; 46,0; 48,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0; 135,0; 140,0; 145,0; 150,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

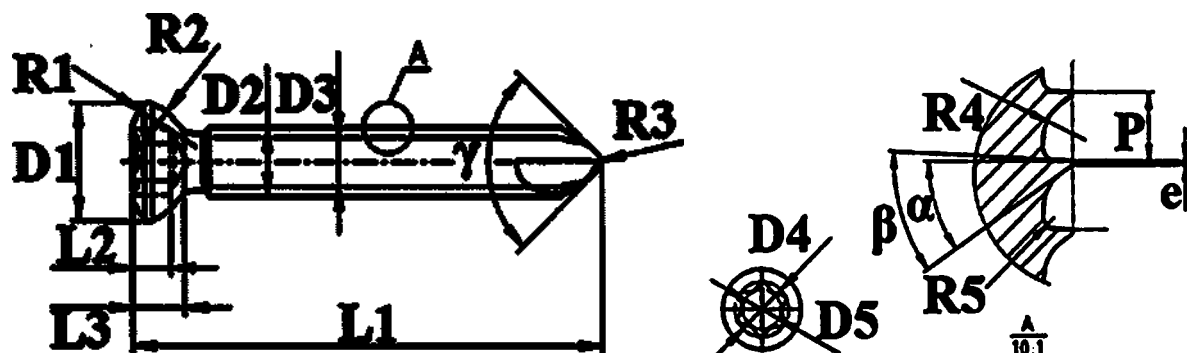


Таблица 4.2.36а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 45,0 мм	45,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 65,0 мм	65,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
27.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 75,0 мм	75,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
28.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
29.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
30.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
31.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
32.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
33.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 105,0 мм	105,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
34.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 110,0 мм	110,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
35.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 115,0 мм	115,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
36.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 120,0 мм	120,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
37.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 125,0 мм	125,00 ± 0,50	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
38.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 130,0 мм	130,00 ± 0,50	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
39.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 135,0 мм	135,00 ± 0,50	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
40.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 140,0 мм	140,00 ± 0,50	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
41.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 145,0 мм	145,00 ± 0,50	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
42.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 150,0 мм	150,00 ± 0,50	2,00 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10

Таблица 4.2.366 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 45,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 55,0 мм	6,00 ± 0,20	3,50 ± 0,20	2,40 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 60,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 65,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 70,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
27.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 75,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
28.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 80,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
29.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 85,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
30.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 90,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
31.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 95,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
32.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 100,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
33.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 105,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
34.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 110,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
35.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 115,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
36.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 120,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
37.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 125,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
38.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 130,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
39.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 135,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
40.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 140,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
41.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 145,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$
42.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 150,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$3,50 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$

Таблица 4.2.36в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,25
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,25
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,25
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,25
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,25
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,25

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 45,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 55,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 60,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 65,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 70,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
27.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 75,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
28.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 80,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
29.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 85,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
30.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 90,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
31.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 95,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
32.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 100,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
33.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 105,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
34.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 110,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
35.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 115,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
36.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 120,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
37.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 125,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
38.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 130,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
39.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 135,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
40.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 140,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
41.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 145,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25
42.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 150,0 мм	3,37± 0,10	2,43 ± 0,10	1,25

Таблица 4.2.36г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	3,50	3,25	0,50
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	3,50	3,25	0,50
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	3,50	3,25	0,50
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	3,50	3,25	0,50
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	3,50	3,25	0,50
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	3,50	3,25	0,50
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	3,50	3,25	0,50
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	3,50	3,25	0,50
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	3,50	3,25	0,50
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	3,50	3,25	0,50
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	3,50	3,25	0,50
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	3,50	3,25	0,50
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	3,50	3,25	0,50
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	3,50	3,25	0,50
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	3,50	3,25	0,50
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	3,50	3,25	0,50

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	3,50	3,25	0,50
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	3,50	3,25	0,50
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 45,0 мм	3,50	3,25	0,50
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	3,50	3,25	0,50
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	3,50	3,25	0,50
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	3,50	3,25	0,50
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 55,0 мм	3,50	3,25	0,50
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 60,0 мм	3,50	3,25	0,50
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 65,0 мм	3,50	3,25	0,50
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 70,0 мм	3,50	3,25	0,50
27.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 75,0 мм	3,50	3,25	0,50
28.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 80,0 мм	3,50	3,25	0,50
29.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 85,0 мм	3,50	3,25	0,50
30.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 90,0 мм	3,50	3,25	0,50
31.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 95,0 мм	3,50	3,25	0,50
32.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 100,0 мм	3,50	3,25	0,50
33.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 105,0 мм	3,50	3,25	0,50
34.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 110,0 мм	3,50	3,25	0,50
35.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 115,0 мм	3,50	3,25	0,50
36.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 120,0 мм	3,50	3,25	0,50
37.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 125,0 мм	3,50	3,25	0,50
38.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 130,0 мм	3,50	3,25	0,50
39.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 135,0 мм	3,50	3,25	0,50
40.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 140,0 мм	3,50	3,25	0,50
41.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 145,0 мм	3,50	3,25	0,50
42.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 150,0 мм	3,50	3,25	0,50

Таблица 4.2.36д – Характеристики изделия

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	e, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	0,80	0,20	0,10
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	0,80	0,20	0,10
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	0,80	0,20	0,10
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	0,80	0,20	0,10
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	0,80	0,20	0,10
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	0,80	0,20	0,10
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	0,80	0,20	0,10
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	0,80	0,20	0,10
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	0,80	0,20	0,10
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	0,80	0,20	0,10
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	0,80	0,20	0,10
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	0,80	0,20	0,10
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	0,80	0,20	0,10
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	0,80	0,20	0,10
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	0,80	0,20	0,10
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	0,80	0,20	0,10
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	0,80	0,20	0,10
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	0,80	0,20	0,10
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 45,0 мм	0,80	0,20	0,10
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	0,80	0,20	0,10
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	0,80	0,20	0,10
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	0,80	0,20	0,10
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 55,0 мм	0,80	0,20	0,10
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 60,0 мм	0,80	0,20	0,10
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 65,0 мм	0,80	0,20	0,10
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 70,0 мм	0,80	0,20	0,10

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	e, мм
27.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 75,0 мм	0,80	0,20	0,10
28.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 80,0 мм	0,80	0,20	0,10
29.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 85,0 мм	0,80	0,20	0,10
30.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 90,0 мм	0,80	0,20	0,10
31.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 95,0 мм	0,80	0,20	0,10
32.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 100,0 мм	0,80	0,20	0,10
33.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 105,0 мм	0,80	0,20	0,10
34.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 110,0 мм	0,80	0,20	0,10
35.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 115,0 мм	0,80	0,20	0,10
36.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 120,0 мм	0,80	0,20	0,10
37.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 125,0 мм	0,80	0,20	0,10
38.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 130,0 мм	0,80	0,20	0,10
39.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 135,0 мм	0,80	0,20	0,10
40.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 140,0 мм	0,80	0,20	0,10
41.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 145,0 мм	0,80	0,20	0,10
42.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 150,0 мм	0,80	0,20	0,10

Таблица 4.2.36е – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 10,0 мм	35	38	90	0,32 ± 0,10
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 12,0 мм	35	38	90	0,37 ± 0,10
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 14,0 мм	35	38	90	0,42 ± 0,10
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 16,0 мм	35	38	90	0,47 ± 0,10
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 18,0 мм	35	38	90	0,52 ± 0,20
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 20,0 мм	35	38	90	0,57 ± 0,20
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 22,0 мм	35	38	90	0,62 ± 0,20
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 24,0 мм	35	38	90	0,67 ± 0,20
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 26,0 мм	35	38	90	0,72 ± 0,20

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 28,0 мм	35	38	90	$0,77 \pm 0,20$
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 30,0 мм	35	38	90	$0,82 \pm 0,20$
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 32,0 мм	35	38	90	$0,87 \pm 0,20$
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 34,0 мм	35	38	90	$0,92 \pm 0,20$
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 36,0 мм	35	38	90	$0,97 \pm 0,20$
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 38,0 мм	35	38	90	$1,02 \pm 0,50$
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 40,0 мм	35	38	90	$1,07 \pm 0,50$
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 42,0 мм	35	38	90	$1,12 \pm 0,50$
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 44,0 мм	35	38	90	$1,17 \pm 0,50$
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 45,0 мм	35	38	90	$1,22 \pm 0,50$
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 46,0 мм	35	38	90	$1,27 \pm 0,50$
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 48,0 мм	35	38	90	$1,32 \pm 0,50$
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 50,0 мм	35	38	90	$1,37 \pm 0,50$
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 55,0 мм	35	38	90	$1,50 \pm 0,50$
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 60,0 мм	35	38	90	$1,62 \pm 0,50$
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 65,0 мм	35	38	90	$1,75 \pm 0,50$
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 70,0 мм	35	38	90	$1,87 \pm 0,50$
27.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 75,0 мм	35	38	90	$2,00 \pm 0,50$
28.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 80,0 мм	35	38	90	$2,12 \pm 0,50$
29.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 85,0 мм	35	38	90	$2,25 \pm 0,50$
30.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 90,0 мм	35	38	90	$2,37 \pm 0,50$
31.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 95,0 мм	35	38	90	$2,50 \pm 0,50$
32.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 100,0 мм	35	38	90	$2,63 \pm 0,50$
33.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 105,0 мм	35	38	90	$2,75 \pm 0,50$
34.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 110,0 мм	35	38	90	$2,88 \pm 0,50$
35.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 115,0 мм	35	38	90	$3,00 \pm 1,00$
36.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 120,0 мм	35	38	90	$3,13 \pm 1,00$

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
37.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 125,0 мм	35	38	90	$3,25 \pm 1,00$
38.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 130,0 мм	35	38	90	$3,38 \pm 1,00$
39.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 135,0 мм	35	38	90	$3,50 \pm 1,00$
40.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 140,0 мм	35	38	90	$3,63 \pm 1,00$
41.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 145,0 мм	35	38	90	$3,76 \pm 1,00$
42.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина 150,0 мм	35	38	90	$3,88 \pm 1,00$

4.2.37. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт самонарезающий, кортикальный MR изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 4,5 мм;
- длина: 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0; 66,0; 68,0; 70,0; 72,0; 76,0; 80,0; 85,0; 90,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

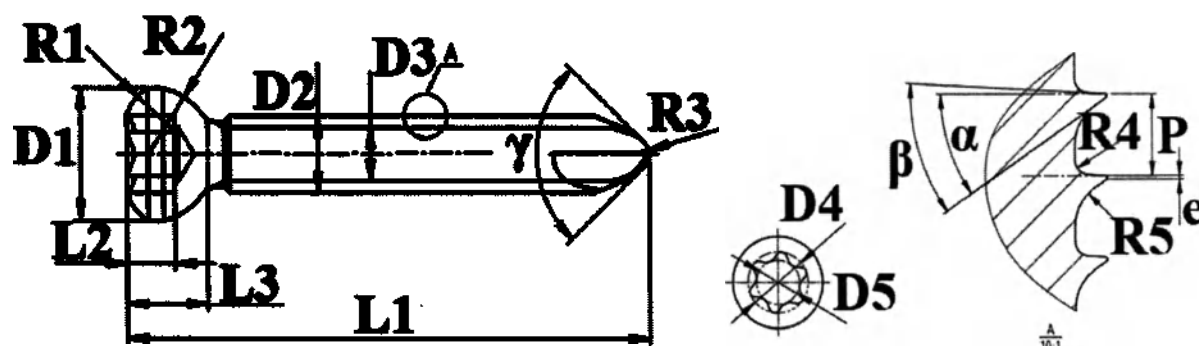


Таблица 4.2.37а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 14,0 мм	$14,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,80 \pm 0,10$
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 16,0 мм	$16,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,80 \pm 0,10$
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,80 \pm 0,10$
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,80 \pm 0,10$
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	$22,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,80 \pm 0,10$
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	$24,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,80 \pm 0,10$
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	$26,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,80 \pm 0,10$
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	$28,00 \pm 0,20$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,80 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	52,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	54,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	56,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	58,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	62,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	64,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
27.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	66,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
28.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	68,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
29.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
30.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 72,0 мм	72,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
31.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 76,0 мм	76,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
32.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
33.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10
34.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,80 ± 0,10

Таблица 4.2.376 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 14,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 16,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 18,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	3,10 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
27.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	$7,90 \pm 0,20$	$4,50 \pm 0,20$	$3,10 \pm 0,20$
28.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	$7,90 \pm 0,20$	$4,50 \pm 0,20$	$3,10 \pm 0,20$
29.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 70,0 мм	$7,90 \pm 0,20$	$4,50 \pm 0,20$	$3,10 \pm 0,20$
30.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 72,0 мм	$7,90 \pm 0,20$	$4,50 \pm 0,20$	$3,10 \pm 0,20$
31.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 76,0 мм	$7,90 \pm 0,20$	$4,50 \pm 0,20$	$3,10 \pm 0,20$
32.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 80,0 мм	$7,90 \pm 0,20$	$4,50 \pm 0,20$	$3,10 \pm 0,20$
33.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 85,0 мм	$7,90 \pm 0,20$	$4,50 \pm 0,20$	$3,10 \pm 0,20$
34.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 90,0 мм	$7,90 \pm 0,20$	$4,50 \pm 0,20$	$3,10 \pm 0,20$

Таблица 4.2.37в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 14,0 мм	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$	1,75
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 16,0 мм	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$	1,75
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 18,0 мм	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$	1,75
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$	1,75
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$	1,75
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$	1,75
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$	1,75
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$	1,75
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$	1,75
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$	1,75
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$	1,75
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$	1,75
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$	1,75
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$	1,75
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$	1,75
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$	1,75
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	$4,55 \pm 0,10$	$3,27 \pm 0,10$	1,75

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
27.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
28.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
29.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 70,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
30.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 72,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
31.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 76,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
32.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 80,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
33.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 85,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75
34.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 90,0 мм	4,55± 0,10	3,27 ± 0,10	1,75

Таблица 4.2.37г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 14,0 мм	3,00	4,00	1,00
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 16,0 мм	3,00	4,00	1,00
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 18,0 мм	3,00	4,00	1,00
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	3,00	4,00	1,00
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	3,00	4,00	1,00
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	3,00	4,00	1,00
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	3,00	4,00	1,00
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	3,00	4,00	1,00

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	3,00	4,00	1,00
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	3,00	4,00	1,00
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	3,00	4,00	1,00
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	3,00	4,00	1,00
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	3,00	4,00	1,00
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	3,00	4,00	1,00
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	3,00	4,00	1,00
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	3,00	4,00	1,00
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	3,00	4,00	1,00
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	3,00	4,00	1,00
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	3,00	4,00	1,00
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	3,00	4,00	1,00
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	3,00	4,00	1,00
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	3,00	4,00	1,00
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	3,00	4,00	1,00
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	3,00	4,00	1,00
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	3,00	4,00	1,00
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	3,00	4,00	1,00
27.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	3,00	4,00	1,00
28.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	3,00	4,00	1,00
29.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 70,0 мм	3,00	4,00	1,00
30.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 72,0 мм	3,00	4,00	1,00
31.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 76,0 мм	3,00	4,00	1,00
32.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 80,0 мм	3,00	4,00	1,00
33.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 85,0 мм	3,00	4,00	1,00
34.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 90,0 мм	3,00	4,00	1,00

Таблица 4.2.37д – Характеристики изделия

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	e, мм
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 14,0 мм	0,30	1,00	0,10
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 16,0 мм	0,30	1,00	0,10
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 18,0 мм	0,30	1,00	0,10
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	0,30	1,00	0,10
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	0,30	1,00	0,10
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	0,30	1,00	0,10
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	0,30	1,00	0,10
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	0,30	1,00	0,10
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	0,30	1,00	0,10
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	0,30	1,00	0,10
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	0,30	1,00	0,10
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	0,30	1,00	0,10
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	0,30	1,00	0,10
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	0,30	1,00	0,10
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	0,30	1,00	0,10
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	0,30	1,00	0,10
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	0,30	1,00	0,10
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	0,30	1,00	0,10
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	0,30	1,00	0,10
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	0,30	1,00	0,10
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	0,30	1,00	0,10
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	0,30	1,00	0,10
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	0,30	1,00	0,10
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	0,30	1,00	0,10
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	0,30	1,00	0,10
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	0,30	1,00	0,10

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	e, мм
27.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	0,30	1,00	0,10
28.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	0,30	1,00	0,10
29.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 70,0 мм	0,30	1,00	0,10
30.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 72,0 мм	0,30	1,00	0,10
31.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 76,0 мм	0,30	1,00	0,10
32.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 80,0 мм	0,30	1,00	0,10
33.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 85,0 мм	0,30	1,00	0,10
34.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 90,0 мм	0,30	1,00	0,10

Таблица 4.2.37е – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 14,0 мм	35	38	90	0,99 ± 0,20
2.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 16,0 мм	35	38	90	1,07 ± 0,50
3.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 18,0 мм	35	38	90	1,15 ± 0,50
4.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 20,0 мм	35	38	90	1,24 ± 0,50
5.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 22,0 мм	35	38	90	1,32 ± 0,50
6.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 24,0 мм	35	38	90	1,40 ± 0,50
7.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 26,0 мм	35	38	90	1,48 ± 0,50
8.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 28,0 мм	35	38	90	1,56 ± 0,50
9.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 30,0 мм	35	38	90	1,64 ± 0,50
10.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 32,0 мм	35	38	90	1,73 ± 0,50
11.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 34,0 мм	35	38	90	1,81 ± 0,50
12.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 36,0 мм	35	38	90	1,89 ± 0,50
13.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 38,0 мм	35	38	90	1,97 ± 0,50
14.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 40,0 мм	35	38	90	2,05 ± 0,50
15.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 42,0 мм	35	38	90	2,14 ± 0,50
16.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 44,0 мм	35	38	90	2,22 ± 0,50
17.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 46,0 мм	35	38	90	2,30 ± 0,50

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
18.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 48,0 мм	35	38	90	$2,38 \pm 0,50$
19.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 50,0 мм	35	38	90	$2,46 \pm 0,50$
20.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 52,0 мм	35	38	90	$2,54 \pm 0,50$
21.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 54,0 мм	35	38	90	$2,63 \pm 0,50$
22.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 56,0 мм	35	38	90	$2,71 \pm 0,50$
23.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 58,0 мм	35	38	90	$2,79 \pm 0,50$
24.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 60,0 мм	35	38	90	$2,87 \pm 0,50$
25.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 62,0 мм	35	38	90	$2,95 \pm 0,50$
26.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 64,0 мм	35	38	90	$3,04 \pm 1,00$
27.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 66,0 мм	35	38	90	$3,12 \pm 1,00$
28.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 68,0 мм	35	38	90	$3,20 \pm 1,00$
29.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 70,0 мм	35	38	90	$3,28 \pm 1,00$
30.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 72,0 мм	35	38	90	$3,36 \pm 1,00$
31.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 76,0 мм	35	38	90	$3,53 \pm 1,00$
32.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 80,0 мм	35	38	90	$3,69 \pm 1,00$
33.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 85,0 мм	35	38	90	$3,90 \pm 1,00$
34.	Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина 90,0 мм	35	38	90	$4,10 \pm 1,00$

4.2.38. Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 4,0 мм;
- длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0 мм;

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

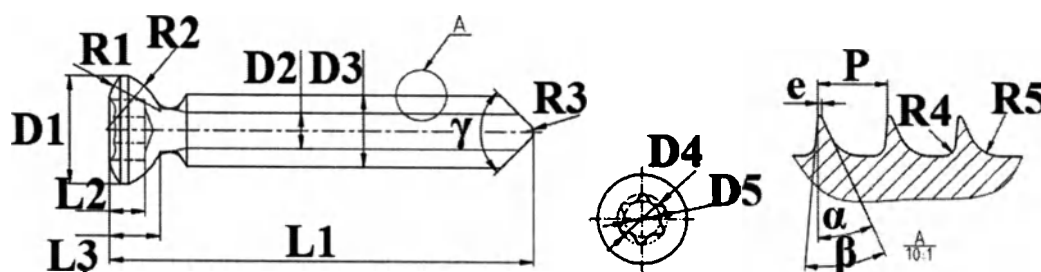


Таблица 4.2.38а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
2.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
3.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 14,0 мм	14,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
4.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
5.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
6.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
7.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
8.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
9.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
10.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
11.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
12.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
13.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 35,0 мм	35,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
14.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
15.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм	45,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
16.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
17.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
18.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10

Таблица 4.2.38б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 10,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20
2.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20
3.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 14,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20
4.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20
5.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	6,00 ± 0,20	2,00 ± 0,20	4,00 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
7.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$
8.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$
9.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$
10.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$
11.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$
12.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$
13.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 35,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$
14.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$
15.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$
16.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$
17.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 55,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$
18.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 60,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$2,00 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$

Таблица 4.2.38в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 10,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,75
2.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,75
3.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 14,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,75
4.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,75
5.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,75
6.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,75
7.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,75
8.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,75
9.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,75
10.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,75
11.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,75
12.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,75
13.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 35,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,75

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
14.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,75
15.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,75
16.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,75
17.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 55,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,75
18.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 60,0 мм	$3,37 \pm 0,10$	$2,43 \pm 0,10$	1,75

Таблица 4.2.38г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 10,0 мм	3,00	3,25	0,50
2.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм	3,00	3,25	0,50
3.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 14,0 мм	3,00	3,25	0,50
4.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	3,00	3,25	0,50
5.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	3,00	3,25	0,50
6.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	3,00	3,25	0,50
7.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	3,00	3,25	0,50
8.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	3,00	3,25	0,50
9.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	3,00	3,25	0,50
10.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	3,00	3,25	0,50
11.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	3,00	3,25	0,50
12.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	3,00	3,25	0,50
13.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 35,0 мм	3,00	3,25	0,50
14.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	3,00	3,25	0,50
15.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм	3,00	3,25	0,50
16.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	3,00	3,25	0,50
17.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 55,0 мм	3,00	3,25	0,50
18.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 60,0 мм	3,00	3,25	0,50

Таблица 4.2.38д – Характеристики изделия

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	e, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 10,0 мм	0,30	0,80	0,10
2.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм	0,30	0,80	0,10
3.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 14,0 мм	0,30	0,80	0,10
4.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	0,30	0,80	0,10
5.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	0,30	0,80	0,10
6.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	0,30	0,80	0,10
7.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	0,30	0,80	0,10
8.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	0,30	0,80	0,10
9.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	0,30	0,80	0,10
10.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	0,30	0,80	0,10
11.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	0,30	0,80	0,10
12.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	0,30	0,80	0,10
13.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 35,0 мм	0,30	0,80	0,10
14.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	0,30	0,80	0,10
15.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм	0,30	0,80	0,10
16.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	0,30	0,80	0,10
17.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 55,0 мм	0,30	0,80	0,10
18.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 60,0 мм	0,30	0,80	0,10

Таблица 4.2.38е – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 10,0 мм	25	30	90	0,34 ± 0,10
2.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм	25	30	90	0,38 ± 0,10
3.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 14,0 мм	25	30	90	0,43 ± 0,10
4.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	25	30	90	0,47 ± 0,10
5.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	25	30	90	0,51 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	25	30	90	0,56 ± 0,20

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
7.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	25	30	90	$0,60 \pm 0,20$
8.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	25	30	90	$0,65 \pm 0,20$
9.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	25	30	90	$0,69 \pm 0,20$
10.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	25	30	90	$0,73 \pm 0,20$
11.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	25	30	90	$0,78 \pm 0,20$
12.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	25	30	90	$0,82 \pm 0,20$
13.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 35,0 мм	25	30	90	$0,89 \pm 0,20$
14.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	25	30	90	$1,00 \pm 0,50$
15.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм	25	30	90	$1,11 \pm 0,50$
16.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	25	30	90	$1,22 \pm 0,50$
17.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 55,0 мм	25	30	90	$1,33 \pm 0,50$
18.	Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 60,0 мм	25	30	90	$1,44 \pm 0,50$

4.2.39. Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 4,0 мм;
- длина: 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

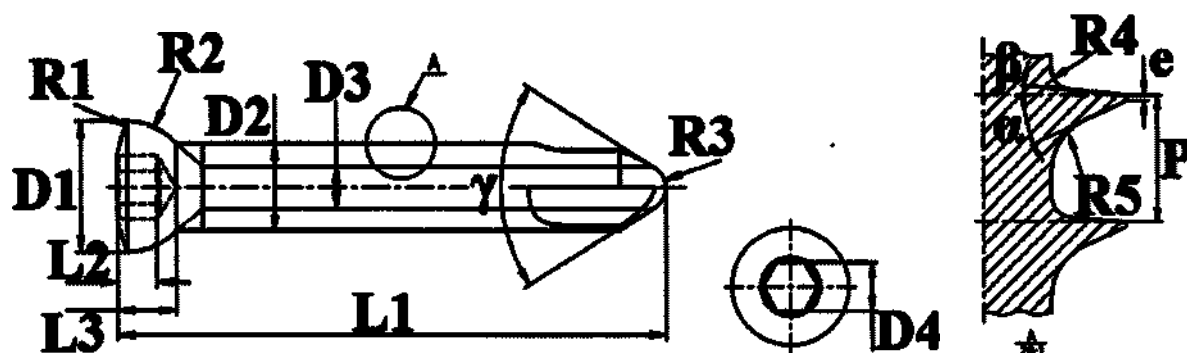


Таблица 4.2.39а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	$16,00 \pm 0,20$	$1,80^{+0,10}_0$	$2,70 \pm 0,10$
2.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,20$	$1,80^{+0,10}_0$	$2,70 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
3.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
4.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
5.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
6.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
7.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
8.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
9.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
10.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
11.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
12.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
13.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
14.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
15.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
16.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
17.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10
18.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	2,70 ± 0,10

Таблица 4.2.396 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
2.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
3.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
4.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
5.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
7.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
8.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20
9.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	5,95 ± 0,20	4,00 ± 0,20	1,90 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
10.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 34,0 мм	$5,95 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$
11.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 36,0 мм	$5,95 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$
12.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 38,0 мм	$5,95 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$
13.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	$5,95 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$
14.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 42,0 мм	$5,95 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$
15.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 44,0 мм	$5,95 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$
16.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 46,0 мм	$5,95 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$
17.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 48,0 мм	$5,95 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$
18.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	$5,95 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$	$1,90 \pm 0,20$

Таблица 4.2.39в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	P, мм
1.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,75
2.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,75
3.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,75
4.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,75
5.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,75
6.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,75
7.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,75
8.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,75
9.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,75
10.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 34,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,75
11.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 36,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,75
12.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 38,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,75
13.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,75
14.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 42,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,75
15.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 44,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,75
16.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 46,0 мм	$2,50 \pm 0,10$	1,75

№	Наименование	D4, мм	P, мм
17.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 48,0 мм	2,50 ± 0,10	1,75
18.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	2,50 ± 0,10	1,75

Таблица 4.2.39г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	7,50	3,00	1,00
2.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	7,50	3,00	1,00
3.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	7,50	3,00	1,00
4.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	7,50	3,00	1,00
5.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	7,50	3,00	1,00
6.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	7,50	3,00	1,00
7.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	7,50	3,00	1,00
8.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	7,50	3,00	1,00
9.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	7,50	3,00	1,00
10.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 34,0 мм	7,50	3,00	1,00
11.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 36,0 мм	7,50	3,00	1,00
12.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 38,0 мм	7,50	3,00	1,00
13.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	7,50	3,00	1,00
14.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 42,0 мм	7,50	3,00	1,00
15.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 44,0 мм	7,50	3,00	1,00
16.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 46,0 мм	7,50	3,00	1,00
17.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 48,0 мм	7,50	3,00	1,00
18.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	7,50	3,00	1,00

Таблица 4.2.39д – Характеристики изделия

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	e, мм
1.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	0,30	0,80	0,10
2.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	0,30	0,80	0,10
3.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	0,30	0,80	0,10

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	e, мм
4.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	0,30	0,80	0,10
5.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	0,30	0,80	0,10
6.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	0,30	0,80	0,10
7.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	0,30	0,80	0,10
8.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	0,30	0,80	0,10
9.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	0,30	0,80	0,10
10.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 34,0 мм	0,30	0,80	0,10
11.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 36,0 мм	0,30	0,80	0,10
12.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 38,0 мм	0,30	0,80	0,10
13.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	0,30	0,80	0,10
14.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 42,0 мм	0,30	0,80	0,10
15.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 44,0 мм	0,30	0,80	0,10
16.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 46,0 мм	0,30	0,80	0,10
17.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 48,0 мм	0,30	0,80	0,10
18.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	0,30	0,80	0,10

Таблица 4.2.39е – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	25	5	70	0,47 ± 0,10
2.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	25	5	70	0,51 ± 0,20
3.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	25	5	70	0,55 ± 0,20
4.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	25	5	70	0,60 ± 0,20
5.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	25	5	70	0,64 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	25	5	70	0,69 ± 0,20
7.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	25	5	70	0,73 ± 0,20
8.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	25	5	70	0,77 ± 0,20
9.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	25	5	70	0,82 ± 0,20
10.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 34,0 мм	25	5	70	0,86 ± 0,20

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
11.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 36,0 мм	25	5	70	$0,91 \pm 0,20$
12.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 38,0 мм	25	5	70	$0,95 \pm 0,20$
13.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	25	5	70	$0,99 \pm 0,20$
14.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 42,0 мм	25	5	70	$1,04 \pm 0,50$
15.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 44,0 мм	25	5	70	$1,08 \pm 0,50$
16.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 46,0 мм	25	5	70	$1,13 \pm 0,50$
17.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 48,0 мм	25	5	70	$1,17 \pm 0,50$
18.	Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	25	5	70	$1,21 \pm 0,50$

4.2.40. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 4,0 мм;
- длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

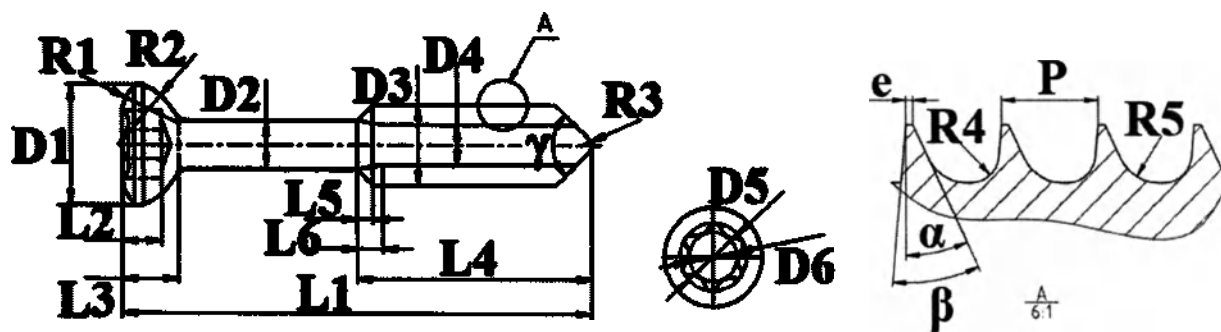


Таблица 4.2.40а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 10,0 мм	$10,00 \pm 0,20$	$2,00^{+0,10}_0$	$2,80 \pm 0,10$
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм	$12,00 \pm 0,20$	$2,00^{+0,10}_0$	$2,80 \pm 0,10$
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 14,0 мм	$14,00 \pm 0,20$	$2,00^{+0,10}_0$	$2,80 \pm 0,10$
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	$16,00 \pm 0,20$	$2,00^{+0,10}_0$	$2,80 \pm 0,10$
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,20$	$2,00^{+0,10}_0$	$2,80 \pm 0,10$
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,20$	$2,00^{+0,10}_0$	$2,80 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 35,0 мм	35,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм	45,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,00 ^{+0,10} ₀	2,80 ± 0,10

Таблица 4.2.406 – Характеристики изделия

№	Наименование	L4, мм	L5, мм	L6, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 10,0 мм	5,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм	5,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 14,0 мм	5,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	6,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	7,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	8,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	9,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	10,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	12,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	14,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	14,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 35,0 мм	14,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	14,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм	15,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20

№	Наименование	L4, мм	L5, мм	L6, мм
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	15,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 55,0 мм	16,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 60,0 мм	16,00 ± 0,50	0,80 ± 0,20	1,30 ± 0,20

Таблица 4.2.40в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 10,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 14,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 35,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 55,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 60,0 мм	6,00 ± 0,20	2,40 ± 0,20	4,00 ± 0,20

Таблица 4.2.40г – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	D6, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 10,0 мм	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 14,0 мм	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	D6, мм
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 35,0 мм	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 55,0 мм	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 60,0 мм	2,00 ± 0,20	3,37 ± 0,10	2,43 ± 0,10

Таблица 4.2.40д – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 10,0 мм	3,00	3,25	0,50
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм	3,00	3,25	0,50
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 14,0 мм	3,00	3,25	0,50
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	3,00	3,25	0,50
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	3,00	3,25	0,50
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	3,00	3,25	0,50
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	3,00	3,25	0,50
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	3,00	3,25	0,50
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	3,00	3,25	0,50
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	3,00	3,25	0,50
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	3,00	3,25	0,50

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 35,0 мм	3,00	3,25	0,50
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	3,00	3,25	0,50
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм	3,00	3,25	0,50
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	3,00	3,25	0,50
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 55,0 мм	3,00	3,25	0,50
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 60,0 мм	3,00	3,25	0,50

Таблица 4.2.40е – Характеристики изделия

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	P, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 10,0 мм	0,30	0,80	1,75
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм	0,30	0,80	1,75
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 14,0 мм	0,30	0,80	1,75
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	0,30	0,80	1,75
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	0,30	0,80	1,75
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	0,30	0,80	1,75
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	0,30	0,80	1,75
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	0,30	0,80	1,75
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	0,30	0,80	1,75
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	0,30	0,80	1,75
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	0,30	0,80	1,75
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 35,0 мм	0,30	0,80	1,75
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	0,30	0,80	1,75
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм	0,30	0,80	1,75
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	0,30	0,80	1,75
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 55,0 мм	0,30	0,80	1,75
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 60,0 мм	0,30	0,80	1,75

Таблица 4.2.40ж – Характеристики изделия

№	Наименование	e, мм	α (°)	β (°)
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 10,0 мм	0,10	25	30
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм	0,10	25	30
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 14,0 мм	0,10	25	30
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	0,10	25	30
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	0,10	25	30
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	0,10	25	30
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	0,10	25	30
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	0,10	25	30
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	0,10	25	30
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	0,10	25	30
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	0,10	25	30
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 35,0 мм	0,10	25	30
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	0,10	25	30
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм	0,10	25	30
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	0,10	25	30
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 55,0 мм	0,10	25	30
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 60,0 мм	0,10	25	30

Таблица 4.2.40з – Характеристики изделия

№	Наименование	γ (°)	Масса, г
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 10,0 мм	90	$0,23 \pm 0,05$
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм	90	$0,28 \pm 0,05$
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 14,0 мм	90	$0,33 \pm 0,10$
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	90	$0,37 \pm 0,10$
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	90	$0,42 \pm 0,10$
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	90	$0,47 \pm 0,10$
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	90	$0,51 \pm 0,20$
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	90	$0,56 \pm 0,20$

№	Наименование	γ (°)	Масса, г
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	90	$0,61 \pm 0,20$
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	90	$0,65 \pm 0,20$
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	90	$0,70 \pm 0,20$
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 35,0 мм	90	$0,82 \pm 0,20$
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	90	$0,93 \pm 0,20$
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 45,0 мм	90	$1,05 \pm 0,50$
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	90	$1,17 \pm 0,50$
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 55,0 мм	90	$1,28 \pm 0,50$
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 60,0 мм	90	$1,40 \pm 0,50$

4.2.41. Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт спонгиозный, с неполной резьбой изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 4,0 мм;
- длина: 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

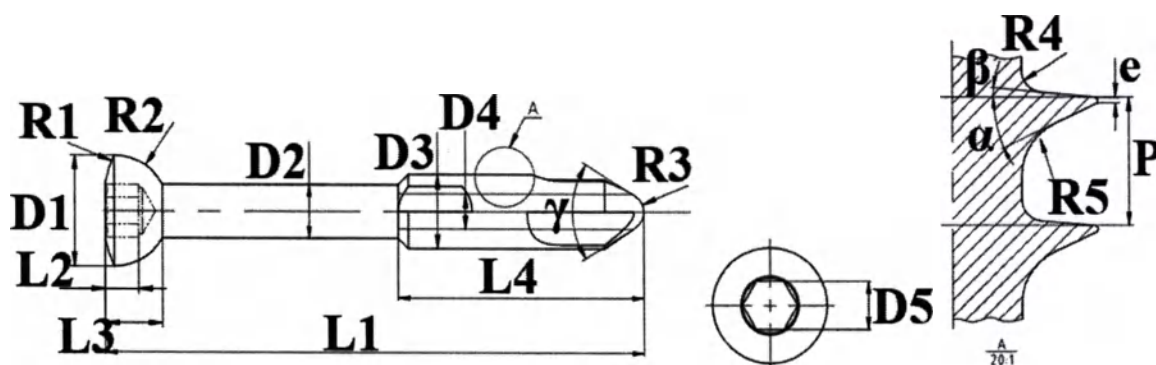


Таблица 4.2.41а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм
1.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	$16,00 \pm 0,20$	$1,80^{+0,10}_0$	$3,10 \pm 0,10$	$8,00 \pm 0,50$
2.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,20$	$1,80^{+0,10}_0$	$3,10 \pm 0,10$	$9,00 \pm 0,50$
3.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,20$	$1,80^{+0,10}_0$	$3,10 \pm 0,10$	$10,00 \pm 0,50$
4.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	$22,00 \pm 0,20$	$1,80^{+0,10}_0$	$3,10 \pm 0,10$	$11,00 \pm 0,50$
5.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	$24,00 \pm 0,20$	$1,80^{+0,10}_0$	$3,10 \pm 0,10$	$12,00 \pm 0,50$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм
6.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	26,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,10} ₀	3,10 ± 0,10	13,00 ± 0,50
7.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	28,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,10} ₀	3,10 ± 0,10	14,00 ± 0,50
8.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	30,00 ± 0,20	1,80 ^{+0,10} ₀	3,10 ± 0,10	15,00 ± 0,50
9.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	32,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	3,10 ± 0,10	16,00 ± 0,50
10.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 34,0 мм	34,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	3,10 ± 0,10	17,00 ± 0,50
11.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 36,0 мм	36,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	3,10 ± 0,10	18,00 ± 0,50
12.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 38,0 мм	38,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	3,10 ± 0,10	19,00 ± 0,50
13.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	3,10 ± 0,10	20,00 ± 0,50
14.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 42,0 мм	42,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	3,10 ± 0,10	21,00 ± 0,50
15.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 44,0 мм	44,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	3,10 ± 0,10	22,00 ± 0,50
16.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 46,0 мм	46,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	3,10 ± 0,10	23,00 ± 0,50
17.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 48,0 мм	48,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	3,10 ± 0,10	24,00 ± 0,50
18.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	1,80 ^{+0,10} ₀	3,10 ± 0,10	25,00 ± 0,50

Таблица 4.2.416 – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20
2.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20
3.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20
4.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20
5.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20
7.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20
8.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20
9.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20
10.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 34,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20
11.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 36,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20
12.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 38,0 мм	5,95 ± 0,20	2,90 ± 0,20	4,00 ± 0,20

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
13.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	$5,95 \pm 0,20$	$2,90 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$
14.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 42,0 мм	$5,95 \pm 0,20$	$2,90 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$
15.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 44,0 мм	$5,95 \pm 0,20$	$2,90 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$
16.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 46,0 мм	$5,95 \pm 0,20$	$2,90 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$
17.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 48,0 мм	$5,95 \pm 0,20$	$2,90 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$
18.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	$5,95 \pm 0,20$	$2,90 \pm 0,20$	$4,00 \pm 0,20$

Таблица 4.2.41в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	R1, мм	R2, мм
1.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	$1,90 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	7,50	3,00
2.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	$1,90 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	7,50	3,00
3.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	$1,90 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	7,50	3,00
4.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	$1,90 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	7,50	3,00
5.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	$1,90 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	7,50	3,00
6.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	$1,90 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	7,50	3,00
7.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	$1,90 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	7,50	3,00
8.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	$1,90 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	7,50	3,00
9.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	$1,90 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	7,50	3,00
10.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 34,0 мм	$1,90 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	7,50	3,00
11.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 36,0 мм	$1,90 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	7,50	3,00
12.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 38,0 мм	$1,90 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	7,50	3,00
13.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	$1,90 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	7,50	3,00
14.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 42,0 мм	$1,90 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	7,50	3,00
15.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 44,0 мм	$1,90 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	7,50	3,00
16.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 46,0 мм	$1,90 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	7,50	3,00
17.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 48,0 мм	$1,90 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	7,50	3,00
18.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	$1,90 \pm 0,20$	$2,50 \pm 0,10$	7,50	3,00

Таблица 4.2.41г – Характеристики изделия

№	Наименование	R3, мм	R4, мм	R5, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	1,00	0,30	0,80	1,75	0,10
2.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	1,00	0,30	0,80	1,75	0,10
3.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	1,00	0,30	0,80	1,75	0,10
4.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	1,00	0,30	0,80	1,75	0,10
5.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	1,00	0,30	0,80	1,75	0,10
6.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	1,00	0,30	0,80	1,75	0,10
7.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	1,00	0,30	0,80	1,75	0,10
8.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	1,00	0,30	0,80	1,75	0,10
9.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	1,00	0,30	0,80	1,75	0,10
10.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 34,0 мм	1,00	0,30	0,80	1,75	0,10
11.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 36,0 мм	1,00	0,30	0,80	1,75	0,10
12.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 38,0 мм	1,00	0,30	0,80	1,75	0,10
13.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	1,00	0,30	0,80	1,75	0,10
14.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 42,0 мм	1,00	0,30	0,80	1,75	0,10
15.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 44,0 мм	1,00	0,30	0,80	1,75	0,10
16.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 46,0 мм	1,00	0,30	0,80	1,75	0,10
17.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 48,0 мм	1,00	0,30	0,80	1,75	0,10
18.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	1,00	0,30	0,80	1,75	0,10

Таблица 4.2.41д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 16,0 мм	25	5	70	0,46 ± 0,10
2.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 18,0 мм	25	5	70	0,50 ± 0,20
3.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 20,0 мм	25	5	70	0,54 ± 0,20
4.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 22,0 мм	25	5	70	0,58 ± 0,20
5.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 24,0 мм	25	5	70	0,62 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 26,0 мм	25	5	70	0,67 ± 0,20

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
7.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 28,0 мм	25	5	70	$0,71 \pm 0,20$
8.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 30,0 мм	25	5	70	$0,75 \pm 0,20$
9.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 32,0 мм	25	5	70	$0,79 \pm 0,20$
10.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 34,0 мм	25	5	70	$0,83 \pm 0,20$
11.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 36,0 мм	25	5	70	$0,87 \pm 0,20$
12.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 38,0 мм	25	5	70	$0,91 \pm 0,20$
13.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 40,0 мм	25	5	70	$0,95 \pm 0,20$
14.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 42,0 мм	25	5	70	$0,99 \pm 0,20$
15.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 44,0 мм	25	5	70	$1,03 \pm 0,50$
16.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 46,0 мм	25	5	70	$1,08 \pm 0,50$
17.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 48,0 мм	25	5	70	$1,12 \pm 0,50$
18.	Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина 50,0 мм	25	5	70	$1,16 \pm 0,50$

4.2.42. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой изготавливается следующих номинальных размеров:

- длина резьбы 16,0 мм;
- диаметр 6,5 мм;
- длина: 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

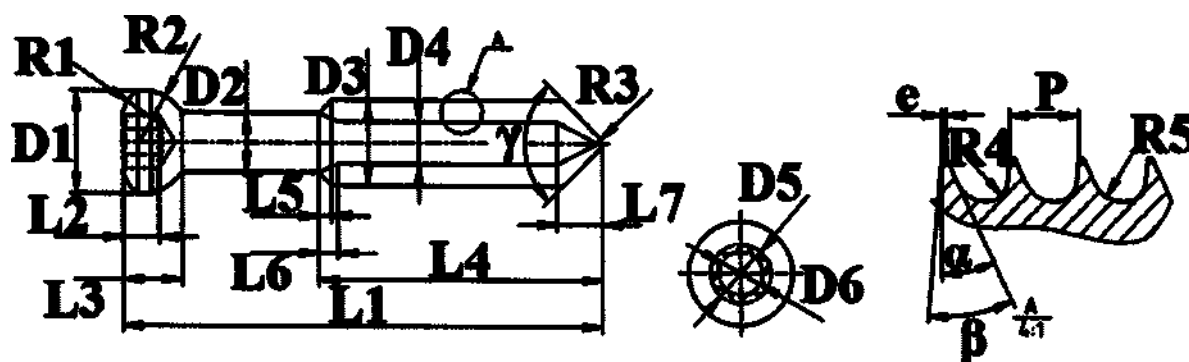


Таблица 4.2.42а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	$30,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,60 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	35,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	40,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	45,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	50,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	55,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	65,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	75,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	105,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	110,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	115,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	120,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10

Таблица 4.2.426 – Характеристики изделия

№	Наименование	L4, мм	L5, мм	L6, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20

№	Наименование	L4, мм	L5, мм	L6, мм
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	16,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20

Таблица 4.2.42в – Характеристики изделия

№	Наименование	L7, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	3,50 ± 0,20	2,75	0,20
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	3,50 ± 0,20	2,75	0,20
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	3,50 ± 0,20	2,75	0,20
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	3,50 ± 0,20	2,75	0,20
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	3,50 ± 0,20	2,75	0,20
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	3,50 ± 0,20	2,75	0,20
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	3,50 ± 0,20	2,75	0,20
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	3,50 ± 0,20	2,75	0,20
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	3,50 ± 0,20	2,75	0,20
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	3,50 ± 0,20	2,75	0,20
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	3,50 ± 0,20	2,75	0,20
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	3,50 ± 0,20	2,75	0,20
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	3,50 ± 0,20	2,75	0,20

№	Наименование	L7, мм	P, мм	e, мм
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	3,50 ± 0,20	2,75	0,20
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	3,50 ± 0,20	2,75	0,20
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	3,50 ± 0,20	2,75	0,20
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	3,50 ± 0,20	2,75	0,20
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	3,50 ± 0,20	2,75	0,20
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	3,50 ± 0,20	2,75	0,20

Таблица 4.2.42г – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20	6,50 ± 0,20

Таблица 4.2.42д – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	D6, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10	3,27 ± 0,10

Таблица 4.2.42е – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	2,80	4,00	0,50
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	2,80	4,00	0,50
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	2,80	4,00	0,50
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	2,80	4,00	0,50
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	2,80	4,00	0,50

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	2,80	4,00	0,50
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	2,80	4,00	0,50
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	2,80	4,00	0,50
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	2,80	4,00	0,50
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	2,80	4,00	0,50
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	2,80	4,00	0,50
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	2,80	4,00	0,50
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	2,80	4,00	0,50
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	2,80	4,00	0,50
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	2,80	4,00	0,50
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	2,80	4,00	0,50
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	2,80	4,00	0,50
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	2,80	4,00	0,50
19	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	2,80	4,00	0,50

Таблица 4.2.42ж – Характеристики изделия

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	α (°)
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	0,80	1,20	25
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	0,80	1,20	25
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	0,80	1,20	25
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	0,80	1,20	25
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	0,80	1,20	25
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	0,80	1,20	25
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	0,80	1,20	25
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	0,80	1,20	25
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	0,80	1,20	25
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	0,80	1,20	25
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	0,80	1,20	25

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	α (°)
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	0,80	1,20	25
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	0,80	1,20	25
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	0,80	1,20	25
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	0,80	1,20	25
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	0,80	1,20	25
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	0,80	1,20	25
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	0,80	1,20	25
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	0,80	1,20	25

Таблица 4.2.42з – Характеристики изделия

№	Наименование	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 30,0 мм	30	90	2,18 ± 0,50
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 35,0 мм	30	90	2,53 ± 0,50
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 40,0 мм	30	90	2,87 ± 0,50
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	30	90	3,22 ± 1,00
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	30	90	3,56 ± 1,00
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	30	90	3,91 ± 1,00
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	30	90	4,25 ± 1,00
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	30	90	4,59 ± 1,00
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	30	90	4,94 ± 1,00
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	30	90	5,28 ± 2,00
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	30	90	5,63 ± 2,00
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	30	90	5,97 ± 2,00
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	30	90	6,32 ± 2,00
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	30	90	6,66 ± 2,00
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	30	90	7,01 ± 2,00
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	30	90	7,35 ± 2,00
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	30	90	7,69 ± 2,00

№	Наименование	β (°)	γ (°)	Масса, г
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	30	90	$8,04 \pm 2,00$
19	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	30	90	$8,38 \pm 2,00$

4.2.43. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой изготавливается следующих номинальных размеров:

- длина резьбы 32,0 мм;
- диаметр 6,5 мм;
- длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0; 135,0; 140,0; 145,0; 150,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

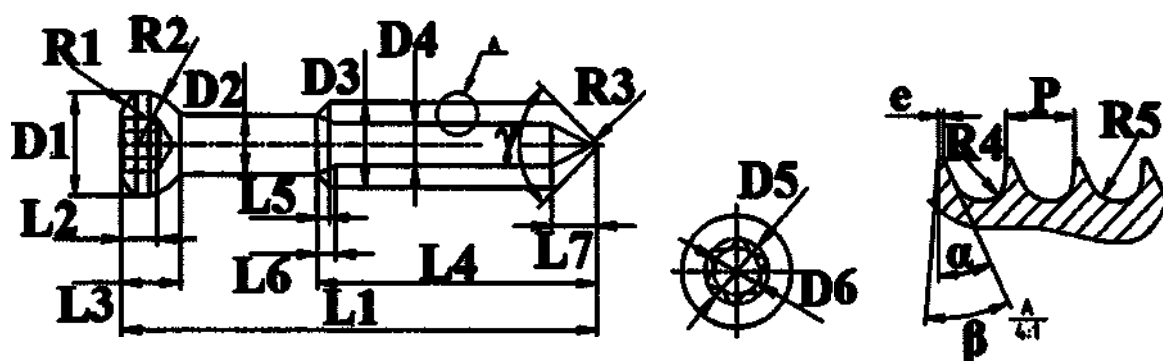


Таблица 4.2.43а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	$45,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,60 \pm 0,10$
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	$50,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,60 \pm 0,10$
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	$55,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,60 \pm 0,10$
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	$60,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,60 \pm 0,10$
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	$65,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,60 \pm 0,10$
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	$70,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,60 \pm 0,10$
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	$75,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,60 \pm 0,10$
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	$80,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,60 \pm 0,10$
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	$85,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,60 \pm 0,10$
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	$90,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,60 \pm 0,10$
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	$95,00 \pm 0,30$	$2,80^{+0,10}_0$	$4,60 \pm 0,10$

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	105,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	110,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	115,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	120,00 ± 0,30	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	125,00 ± 0,50	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	130,00 ± 0,50	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	135,00 ± 0,50	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
20.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 140,0 мм	140,00 ± 0,50	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
21.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 145,0 мм	145,00 ± 0,50	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10
22.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 150,0 мм	150,00 ± 0,50	2,80 ^{+0,10} ₀	4,60 ± 0,10

Таблица 4.2.436 – Характеристики изделия

№	Наименование	L4, мм	L5, мм	L6, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	32,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	32,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	32,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	32,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	32,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	32,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	32,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	32,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	32,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	32,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	32,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	32,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	32,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	32,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20

№	Наименование	L4, мм	L5, мм	L6, мм
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	32,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	32,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	32,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	32,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	32,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
20.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 140,0 мм	32,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
21.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 145,0 мм	32,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20
22.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 150,0 мм	32,00 ± 0,50	1,00 ± 0,20	1,50 ± 0,20

Таблица 4.2.43в – Характеристики изделия

№	Наименование	L7, мм	D1, мм	D2, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	3,50 ± 0,20	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	3,50 ± 0,20	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	3,50 ± 0,20	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	3,50 ± 0,20	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	3,50 ± 0,20	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	3,50 ± 0,20	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	3,50 ± 0,20	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	3,50 ± 0,20	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	3,50 ± 0,20	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	3,50 ± 0,20	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	3,50 ± 0,20	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	3,50 ± 0,20	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	3,50 ± 0,20	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	3,50 ± 0,20	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	3,50 ± 0,20	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	3,50 ± 0,20	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	3,50 ± 0,20	7,90 ± 0,20	4,50 ± 0,20

№	Наименование	L7, мм	D1, мм	D2, мм
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	$3,50 \pm 0,20$	$7,90 \pm 0,20$	$4,50 \pm 0,20$
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	$3,50 \pm 0,20$	$7,90 \pm 0,20$	$4,50 \pm 0,20$
20.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 140,0 мм	$3,50 \pm 0,20$	$7,90 \pm 0,20$	$4,50 \pm 0,20$
21.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 145,0 мм	$3,50 \pm 0,20$	$7,90 \pm 0,20$	$4,50 \pm 0,20$
22.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 150,0 мм	$3,50 \pm 0,20$	$7,90 \pm 0,20$	$4,50 \pm 0,20$

Таблица 4.2.43г – Характеристики изделия

№	Наименование	D3, мм	D4, мм	D5, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	$3,20 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	$3,20 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	$3,20 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	$3,20 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	$6,50 \pm 0,20$	$3,20 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	$3,20 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	$3,20 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	$3,20 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	$3,20 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	$3,20 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	$3,20 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	$3,20 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	$3,20 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	$3,20 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	$3,20 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	$3,20 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	$3,20 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	$3,20 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	$3,20 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$
20.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 140,0 мм	$6,50 \pm 0,20$	$3,20 \pm 0,20$	$4,55 \pm 0,10$

№	Наименование	D3, мм	D4, мм	D5, мм
21.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 145,0 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10
22.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 150,0 мм	6,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	4,55 ± 0,10

Таблица 4.2.43д – Характеристики изделия

№	Наименование	D6, мм	P, мм	e, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	3,27 ± 0,10	2,75	0,20
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	3,27 ± 0,10	2,75	0,20
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	3,27 ± 0,10	2,75	0,20
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	3,27 ± 0,10	2,75	0,20
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	3,27 ± 0,10	2,75	0,20
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	3,27 ± 0,10	2,75	0,20
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	3,27 ± 0,10	2,75	0,20
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	3,27 ± 0,10	2,75	0,20
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	3,27 ± 0,10	2,75	0,20
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	3,27 ± 0,10	2,75	0,20
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	3,27 ± 0,10	2,75	0,20
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	3,27 ± 0,10	2,75	0,20
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	3,27 ± 0,10	2,75	0,20
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	3,27 ± 0,10	2,75	0,20
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	3,27 ± 0,10	2,75	0,20
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	3,27 ± 0,10	2,75	0,20
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	3,27 ± 0,10	2,75	0,20
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	3,27 ± 0,10	2,75	0,20
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	3,27 ± 0,10	2,75	0,20
20.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 140,0 мм	3,27 ± 0,10	2,75	0,20
21.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 145,0 мм	3,27 ± 0,10	2,75	0,20
22.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 150,0 мм	3,27 ± 0,10	2,75	0,20

Таблица 4.2.43е – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	2,80	4,00	0,50
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	2,80	4,00	0,50
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	2,80	4,00	0,50
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	2,80	4,00	0,50
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	2,80	4,00	0,50
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	2,80	4,00	0,50
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	2,80	4,00	0,50
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	2,80	4,00	0,50
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	2,80	4,00	0,50
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	2,80	4,00	0,50
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	2,80	4,00	0,50
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	2,80	4,00	0,50
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	2,80	4,00	0,50
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	2,80	4,00	0,50
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	2,80	4,00	0,50
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	2,80	4,00	0,50
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	2,80	4,00	0,50
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	2,80	4,00	0,50
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	2,80	4,00	0,50
20.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 140,0 мм	2,80	4,00	0,50
21.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 145,0 мм	2,80	4,00	0,50
22.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 150,0 мм	2,80	4,00	0,50

Таблица 4.2.43ж – Характеристики изделия

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	α (°)
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	0,80	1,20	25
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	0,80	1,20	25

№	Наименование	R4, мм	R5, мм	α (°)
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	0,80	1,20	25
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	0,80	1,20	25
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	0,80	1,20	25
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	0,80	1,20	25
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	0,80	1,20	25
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	0,80	1,20	25
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	0,80	1,20	25
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	0,80	1,20	25
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	0,80	1,20	25
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	0,80	1,20	25
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	0,80	1,20	25
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	0,80	1,20	25
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	0,80	1,20	25
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	0,80	1,20	25
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	0,80	1,20	25
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	0,80	1,20	25
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	0,80	1,20	25
20.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 140,0 мм	0,80	1,20	25
21.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 145,0 мм	0,80	1,20	25
22.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 150,0 мм	0,80	1,20	25

Таблица 4.2.43з – Характеристики изделия

№	Наименование	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 45,0 мм	30	90	3,06 ± 1,00
2.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 50,0 мм	30	90	3,41 ± 1,00
3.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 55,0 мм	30	90	3,75 ± 1,00
4.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	30	90	4,10 ± 1,00
5.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 65,00 мм	30	90	4,44 ± 1,00

№	Наименование	β (°)	γ (°)	Масса, г
6.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	30	90	$4,78 \pm 1,00$
7.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	30	90	$5,13 \pm 2,00$
8.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	30	90	$5,47 \pm 2,00$
9.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	30	90	$5,82 \pm 2,00$
10.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	30	90	$6,16 \pm 2,00$
11.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	30	90	$6,51 \pm 2,00$
12.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	30	90	$6,85 \pm 2,00$
13.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	30	90	$7,20 \pm 2,00$
14.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	30	90	$7,54 \pm 2,00$
15.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	30	90	$7,88 \pm 2,00$
16.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	30	90	$8,23 \pm 2,00$
17.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	30	90	$8,57 \pm 2,00$
18.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	30	90	$8,92 \pm 2,00$
19.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 135,0 мм	30	90	$9,26 \pm 2,00$
20.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 140,0 мм	30	90	$9,61 \pm 2,00$
21.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 145,0 мм	30	90	$9,95 \pm 2,00$
22.	Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина 150,0 мм	30	90	$10,30 \pm 4,00$

4.2.44. Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт канюлированный, конический MR изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 6,5 мм;
- длина: 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

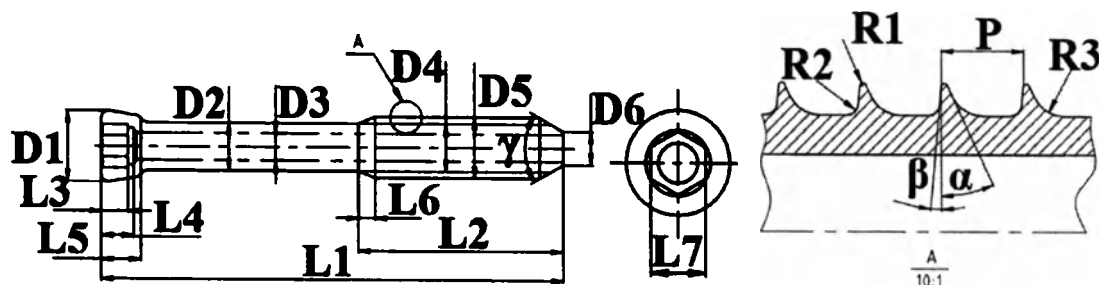


Таблица 4.2.44а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	60,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10
2.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	65,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10
3.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	70,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10
4.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	75,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10
5.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	80,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10
6.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	85,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10
7.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	90,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10
8.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	95,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10
9.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	100,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10
10.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	105,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10
11.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	110,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10
12.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	115,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10
13.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	120,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10
14.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	125,00 ± 0,50	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10
15.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	130,00 ± 0,50	22,00 ± 0,50	2,90 ± 0,10

Таблица 4.2.44б – Характеристики изделия

№	Наименование	L4, мм	L5, мм	L6, мм	L7, мм
1.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
2.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
3.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
4.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
5.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
6.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
7.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
8.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10
9.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	3,50 ± 0,10	4,30 ± 0,10	1,80 ± 0,10	4,00 ± 0,10

№	Наименование	L4, мм	L5, мм	L6, мм	L7, мм
10.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	$3,50 \pm 0,10$	$4,30 \pm 0,10$	$1,80 \pm 0,10$	$4,00 \pm 0,10$
11.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	$3,50 \pm 0,10$	$4,30 \pm 0,10$	$1,80 \pm 0,10$	$4,00 \pm 0,10$
12.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	$3,50 \pm 0,10$	$4,30 \pm 0,10$	$1,80 \pm 0,10$	$4,00 \pm 0,10$
13.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	$3,50 \pm 0,10$	$4,30 \pm 0,10$	$1,80 \pm 0,10$	$4,00 \pm 0,10$
14.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	$3,50 \pm 0,10$	$4,30 \pm 0,10$	$1,80 \pm 0,10$	$4,00 \pm 0,10$
15.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	$3,50 \pm 0,10$	$4,30 \pm 0,10$	$1,80 \pm 0,10$	$4,00 \pm 0,10$

Таблица 4.2.44в – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	$7,60 \pm 0,20$	$5,10 \pm 0,20$	$2,90 \pm 0,20$
2.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	$7,60 \pm 0,20$	$5,10 \pm 0,20$	$2,90 \pm 0,20$
3.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	$7,60 \pm 0,20$	$5,10 \pm 0,20$	$2,90 \pm 0,20$
4.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	$7,60 \pm 0,20$	$5,10 \pm 0,20$	$2,90 \pm 0,20$
5.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	$7,60 \pm 0,20$	$5,10 \pm 0,20$	$2,90 \pm 0,20$
6.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	$7,60 \pm 0,20$	$5,10 \pm 0,20$	$2,90 \pm 0,20$
7.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	$7,60 \pm 0,20$	$5,10 \pm 0,20$	$2,90 \pm 0,20$
8.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	$7,60 \pm 0,20$	$5,10 \pm 0,20$	$2,90 \pm 0,20$
9.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	$7,60 \pm 0,20$	$5,10 \pm 0,20$	$2,90 \pm 0,20$
10.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	$7,60 \pm 0,20$	$5,10 \pm 0,20$	$2,90 \pm 0,20$
11.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	$7,60 \pm 0,20$	$5,10 \pm 0,20$	$2,90 \pm 0,20$
12.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	$7,60 \pm 0,20$	$5,10 \pm 0,20$	$2,90 \pm 0,20$
13.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	$7,60 \pm 0,20$	$5,10 \pm 0,20$	$2,90 \pm 0,20$
14.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	$7,60 \pm 0,20$	$5,10 \pm 0,20$	$2,90 \pm 0,20$
15.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	$7,60 \pm 0,20$	$5,10 \pm 0,20$	$2,90 \pm 0,20$

Таблица 4.2.44г – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	D6, мм
1.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	$5,10 \pm 0,20$	$6,50 \pm 0,20$	$3,60 \pm 0,20$
2.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	$5,10 \pm 0,20$	$6,50 \pm 0,20$	$3,60 \pm 0,20$

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	D6, мм
3.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
4.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
5.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
6.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
7.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
8.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
9.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
10.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
11.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
12.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
13.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
14.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20
15.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	5,10 ± 0,20	6,50 ± 0,20	3,60 ± 0,20

Таблица 4.2.44д – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	P, мм
1.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
2.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
3.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
4.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
5.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
6.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
7.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
8.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
9.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
10.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
11.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
12.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм	P, мм
13.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
14.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80
15.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	0,05	0,20	0,80	1,80

Таблица 4.2.44е – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 60,0 мм	35	3	60	2,53 ± 0,50
2.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 65,0 мм	35	3	60	2,93 ± 0,50
3.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 70,0 мм	35	3	60	3,33 ± 1,00
4.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 75,0 мм	35	3	60	3,73 ± 1,00
5.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 80,0 мм	35	3	60	4,13 ± 1,00
6.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 85,0 мм	35	3	60	4,53 ± 1,00
7.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 90,0 мм	35	3	60	4,93 ± 1,00
8.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 95,0 мм	35	3	60	5,33 ± 2,00
9.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 100,0 мм	35	3	60	5,73 ± 2,00
10.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 105,0 мм	35	3	60	6,13 ± 2,00
11.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 110,0 мм	35	3	60	6,53 ± 2,00
12.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 115,0 мм	35	3	60	6,93 ± 2,00
13.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 120,0 мм	35	3	60	7,33 ± 2,00
14.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 125,0 мм	35	3	60	7,73 ± 2,00
15.	Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина 130,0 мм	35	3	60	8,13 ± 2,00

4.2.45. Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт блокирующий самонарезающий изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 2,4 мм;
- длина: 8,0; 10,0; 12,0; 14,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

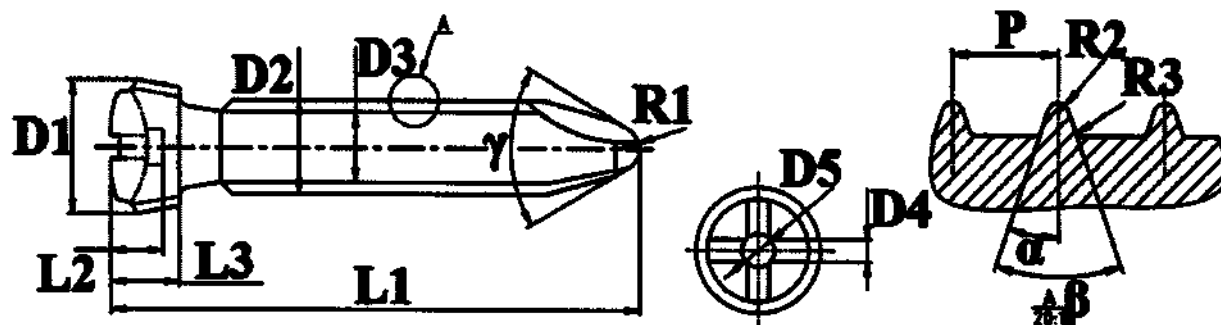


Таблица 4.2.45а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	$8,00 \pm 0,20$	$1,40^{+0,10}_0$	$1,80 \pm 0,10$
2.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	$10,00 \pm 0,20$	$1,40^{+0,10}_0$	$1,80 \pm 0,10$
3.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	$12,00 \pm 0,20$	$1,40^{+0,10}_0$	$1,80 \pm 0,10$
4.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	$14,00 \pm 0,20$	$1,40^{+0,10}_0$	$1,80 \pm 0,10$

Таблица 4.2.45б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	$3,50 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,80 \pm 0,20$
2.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	$3,50 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,80 \pm 0,20$
3.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	$3,50 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,80 \pm 0,20$
4.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	$3,50 \pm 0,20$	$2,40 \pm 0,20$	$1,80 \pm 0,20$

Таблица 4.2.45в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	$0,60 \pm 0,10$	$0,90 \pm 0,10$	1,00
2.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	$0,60 \pm 0,10$	$0,90 \pm 0,10$	1,00
3.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	$0,60 \pm 0,10$	$0,90 \pm 0,10$	1,00
4.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	$0,60 \pm 0,10$	$0,90 \pm 0,10$	1,00

Таблица 4.2.45г – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
1.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	0,60	0,10	0,05
2.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	0,60	0,10	0,05
3.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	0,60	0,10	0,05

№	Наименование	R1, мм	R2, мм	R3, мм
4.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	0,60	0,10	0,05

Таблица 4.2.45д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 8,0 мм	19	38	60	не более 0,10
2.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 10,0 мм	19	38	60	$0,12 \pm 0,05$
3.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 12,0 мм	19	38	60	$0,15 \pm 0,05$
4.	Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина 14,0 мм	19	38	60	$0,18 \pm 0,05$

4.2.46. Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт блокирующий MR изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 1,5 мм;
- длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

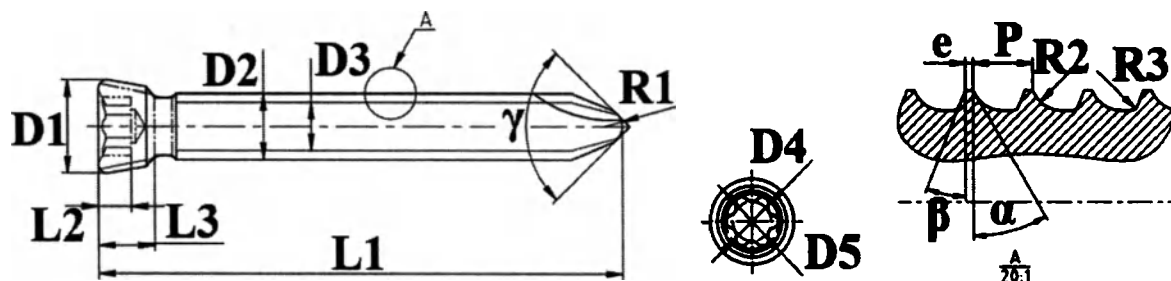


Таблица 4.2.46а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	L3, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$1,30 \pm 0,10$
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	$7,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$1,30 \pm 0,10$
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	$8,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$1,30 \pm 0,10$
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 9,0 мм	$9,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$1,30 \pm 0,10$
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	$10,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$1,30 \pm 0,10$
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 11,0 мм	$11,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$1,30 \pm 0,10$
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	$12,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$1,30 \pm 0,10$
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 13,0 мм	$13,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$1,30 \pm 0,10$
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	$14,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$1,30 \pm 0,10$
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 15,0 мм	$15,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$1,30 \pm 0,10$
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	$16,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$1,30 \pm 0,10$
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	$18,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$1,30 \pm 0,10$
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	$20,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$1,30 \pm 0,10$
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 22,0 мм	$22,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$1,30 \pm 0,10$
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 24,0 мм	$24,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$1,30 \pm 0,10$

Таблица 4.2.46б – Характеристики изделия

№	Наименование	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 9,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 11,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 13,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 15,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 22,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 24,0 мм	2,15 ± 0,20	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20

Таблица 4.2.46в – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм	P, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 9,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 11,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 13,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 15,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 22,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 24,0 мм	1,34 ± 0,10	0,96 ± 0,10	0,60

Таблица 4.2.46г – Характеристики изделия

№	Наименование	e, мм	R1, мм	R2, мм
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	0,08	0,40	0,30
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	0,08	0,40	0,30
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	0,08	0,40	0,30
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 9,0 мм	0,08	0,40	0,30
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	0,08	0,40	0,30
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 11,0 мм	0,08	0,40	0,30
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	0,08	0,40	0,30
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 13,0 мм	0,08	0,40	0,30
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	0,08	0,40	0,30
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 15,0 мм	0,08	0,40	0,30
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	0,08	0,40	0,30
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	0,08	0,40	0,30
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	0,08	0,40	0,30

№	Наименование	e, мм	R1, мм	R2, мм
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 22,0 мм	0,08	0,40	0,30
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 24,0 мм	0,08	0,40	0,30

Таблица 4.2.46д– Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	30	22	90	не более 0,10
2.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	30	22	90	не более 0,10
3.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	30	22	90	не более 0,10
4.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 9,0 мм	30	22	90	не более 0,10
5.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	30	22	90	не более 0,10
6.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 11,0 мм	30	22	90	не более 0,10
7.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	30	22	90	не более 0,10
8.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 13,0 мм	30	22	90	не более 0,10
9.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	30	22	90	не более 0,10
10.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 15,0 мм	30	22	90	не более 0,10
11.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	30	22	90	не более 0,10
12.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	30	22	90	не более 0,10
13.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	30	22	90	$0,10 \pm 0,05$
14.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 22,0 мм	30	22	90	$0,11 \pm 0,05$
15.	Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина 24,0 мм	30	22	90	$0,12 \pm 0,05$

4.2.47. Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт кортикальный MR изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 1,5 мм;
- длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

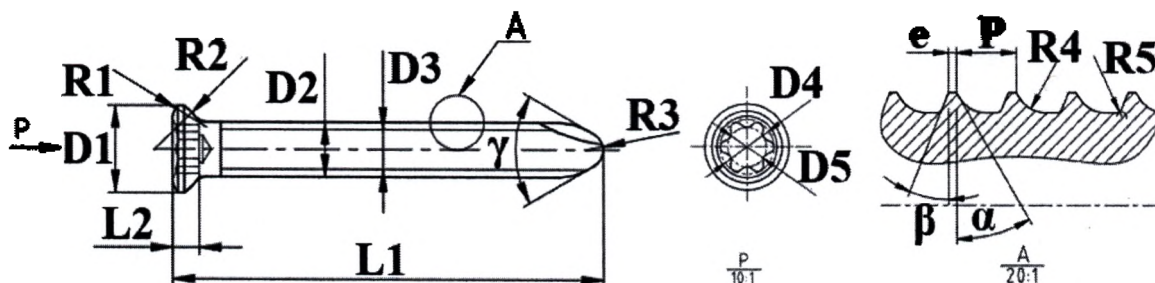


Таблица 4.2.47а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	D1, мм
1.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	$6,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$2,40 \pm 0,20$
2.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	$7,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$2,40 \pm 0,20$
3.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	$8,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$2,40 \pm 0,20$
4.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 9,0 мм	$9,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$2,40 \pm 0,20$
5.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	$10,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$2,40 \pm 0,20$
6.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 11,0 мм	$11,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$2,40 \pm 0,20$
7.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	$12,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$2,40 \pm 0,20$
8.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 13,0 мм	$13,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$2,40 \pm 0,20$
9.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	$14,00 \pm 0,20$	$0,75^{+0,10}_0$	$2,40 \pm 0,20$

Документ компании «Ухань Майндрой Сангитифик Ко., Лтд.» /

Wuhan Mindray Sanguitific Co., Ltd. Все права защищены.

№	Наименование	L1, мм	L2, мм	D1, мм
10.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 15,0 мм	15,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,20
11.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	16,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,20
12.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	18,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,20
13.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	20,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,20
14.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 22,0 мм	22,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,20
15.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 24,0 мм	24,00 ± 0,20	0,75 ^{+0,10} ₀	2,40 ± 0,20

Таблица 4.2.47б – Характеристики изделия

№	Наименование	D2, мм	D3, мм	D4, мм
1.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
2.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
3.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
4.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 9,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
5.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
6.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 11,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
7.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
8.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 13,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
9.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
10.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 15,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
11.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
12.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
13.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
14.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 22,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10
15.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 24,0 мм	1,50 ± 0,20	1,10 ± 0,20	1,34 ± 0,10

Таблица 4.2.47в – Характеристики изделия

№	Наименование	D5, мм	P, мм	e, мм	R1, мм
1.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	0,96 ± 0,10	0,60	0,08	0,50
2.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	0,96 ± 0,10	0,60	0,08	0,50
3.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	0,96 ± 0,10	0,60	0,08	0,50
4.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 9,0 мм	0,96 ± 0,10	0,60	0,08	0,50
5.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	0,96 ± 0,10	0,60	0,08	0,50
6.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 11,0 мм	0,96 ± 0,10	0,60	0,08	0,50
7.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	0,96 ± 0,10	0,60	0,08	0,50
8.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 13,0 мм	0,96 ± 0,10	0,60	0,08	0,50
9.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	0,96 ± 0,10	0,60	0,08	0,50
10.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 15,0 мм	0,96 ± 0,10	0,60	0,08	0,50
11.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	0,96 ± 0,10	0,60	0,08	0,50
12.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	0,96 ± 0,10	0,60	0,08	0,50
13.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	0,96 ± 0,10	0,60	0,08	0,50
14.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 22,0 мм	0,96 ± 0,10	0,60	0,08	0,50
15.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 24,0 мм	0,96 ± 0,10	0,60	0,08	0,50

Таблица 4.2.47г – Характеристики изделия

№	Наименование	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
1.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
2.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
3.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
4.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 9,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
5.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05

№	Наименование	R2, мм	R3, мм	R4, мм	R5, мм
6.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 11,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
7.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
8.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 13,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
9.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
10.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 15,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
11.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
12.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
13.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
14.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 22,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05
15.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 24,0 мм	1,50	0,50	0,30	0,05

Таблица 4.2.47д – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)	γ (°)	Масса, г
1.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 6,0 мм	30	22	60	не более 0,10
2.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 7,0 мм	30	22	60	не более 0,10
3.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 8,0 мм	30	22	60	не более 0,10
4.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 9,0 мм	30	22	60	не более 0,10
5.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 10,0 мм	30	22	60	не более 0,10
6.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 11,0 мм	30	22	60	не более 0,10
7.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 12,0 мм	30	22	60	не более 0,10
8.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 13,0 мм	30	22	60	не более 0,10
9.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 14,0 мм	30	22	60	не более 0,10
10.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 15,0 мм	30	22	60	не более 0,10
11.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 16,0 мм	30	22	60	не более 0,10
12.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 18,0 мм	30	22	60	0,10 ± 0,05
13.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 20,0 мм	30	22	60	0,11 ± 0,05
14.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 22,0 мм	30	22	60	0,12 ± 0,05
15.	Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина 24,0 мм	30	22	60	0,13 ± 0,05

4.2.48. Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм

Винт представляет собой изделие специальной формы для имплантации на фрагменты сломанных костей пациента с целью фиксации костных пластин, соединения и стабилизации отломков кости, а также для защиты кости от механической нагрузки на период сращения перелома.

Винт блокирующий, самонарезающий изготавливается следующих номинальных размеров:

- диаметр 2,0 мм;
- длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0 мм.

Характеристики, существенные для обеспечения функционального назначения изделия, приведены ниже.

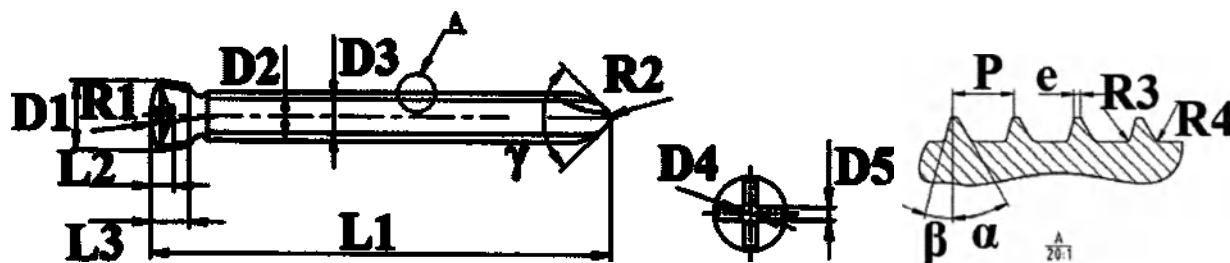


Таблица 4.2.48а – Характеристики изделия

№	Наименование	L1, мм	L2, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	6,00 ± 0,20	1,00 ^{+0,10} ₀

№	Наименование	L1, мм	L2, мм
2.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	8,00 ± 0,20	1,00 ^{+0,10} ₀
3.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	10,00 ± 0,20	1,00 ^{+0,10} ₀
4.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	12,00 ± 0,20	1,00 ^{+0,10} ₀

Таблица 4.2.48б – Характеристики изделия

№	Наименование	L3, мм	D1, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	1,60 ± 0,10	2,90 ± 0,20
2.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	1,60 ± 0,10	2,90 ± 0,20
3.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	1,60 ± 0,10	2,90 ± 0,20
4.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	1,60 ± 0,10	2,90 ± 0,20

Таблица 4.2.48в – Характеристики изделия

№	Наименование	D2, мм	D3, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
2.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
3.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20
4.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	2,00 ± 0,20	1,40 ± 0,20

Таблица 4.2.48г – Характеристики изделия

№	Наименование	D4, мм	D5, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	0,80 ± 0,10	0,50 ± 0,10
2.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	0,80 ± 0,10	0,50 ± 0,10
3.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	0,80 ± 0,10	0,50 ± 0,10
4.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	0,80 ± 0,10	0,50 ± 0,10

Таблица 4.2.48д – Характеристики изделия

№	Наименование	P, мм	e, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	0,75	0,10
2.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	0,75	0,10
3.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	0,75	0,10
4.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	0,75	0,10

Таблица 4.2.48е – Характеристики изделия

№	Наименование	R1, мм	R2, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	3,00	0,50
2.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	3,00	0,50
3.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	3,00	0,50
4.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	3,00	0,50

Таблица 4.2.48ж – Характеристики изделия

№	Наименование	R3, мм	R4, мм
1.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	0,05	0,08
2.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	0,05	0,08
3.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	0,05	0,08
4.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	0,05	0,08

Таблица 4.2.48з – Характеристики изделия

№	Наименование	α (°)	β (°)
1.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	30	15
2.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	30	15
3.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	30	15
4.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	30	15

Таблица 4.2.48и – Характеристики изделия

№	Наименование	γ (°)	Масса, г
1.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 6,0 мм	90	не более 0,10
2.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 8,0 мм	90	не более 0,10
3.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 10,0 мм	90	не более 0,10
4.	Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина 12,0 мм	90	0,10 ± 0,05

5. Маркировка, упаковка, комплект поставки

5.1. Маркировка медицинского изделия

Маркировка изделия выполняется путём нанесения сведений на изделие, на основную и дополнительную этикетку, прикрепляемую к индивидуальной упаковке, на этикетку, прикрепляемую к внешней (транспортной) упаковке, а также на поверхность транспортной упаковки.

а) Маркировка на винте (кроме стягивающего винта DHS/DCS) выполняется на его головке или, при отсутствии достаточного места – на его стержне. Маркировка содержит:

- обозначение материала, из которого изготовлено изделие: надпись «Т» – изделие изготовлено из титанового сплава;
- одно из обозначений производителя: логотип «m+», надпись «mindray», надпись «Dragonbio», надпись «DB»;
- код партии изделия;
- типоразмер изделия – обозначения диаметра и длины в формате «ØXX×XXмм».

Маркировка стягивающего винта DHS/DCS выполняется на его боковой части. Маркировка содержит:

- маркировку CE, с указанием номера нотифицированного органа;
- условное обозначение изделия, присвоенное производителем;
- серийный номер изделия;
- номер изделия по каталогу;
- типоразмер изделия – обозначения диаметра и длины в формате «ØXX×XXмм».

Примечание:

Все или отдельные элементы маркировки могут быть не указаны на поверхности изделия в случае отсутствия на поверхности достаточного места, например, на винтах малых типоразмеров. В этом случае маркировка указывается только на этикетках изделия.

б) Основная этикетка с маркировкой крепится на непрозрачной стороне индивидуальной упаковки изделия. Этикетка содержит:

- наименование изделия;
- типоразмер изделия;
- символ «Номер по каталогу» по ISO 15223-1 и номер по каталогу изделия, присвоенный производителем;
- символ «Код партии» или «Серийный номер» по ISO 15223-1 и присвоенный производителем код партии или серийный номер изделия, соответственно;
- количество изделий в упаковке;
- обозначение материала, из которого изготовлено изделие: надпись «Titanium» – изделие изготовлено из титанового сплава;
- символ «Дата изготовления» по ISO 15223-1 и дату изготовления изделия в формате «ГГТТ-ММ-ДД»;
- штрих-код и/или QR-код;

- маркировку CE, с указанием номера нотифицированного органа;
- символ «Осторожно» по ISO 15223-1;
- символ «Запрет на повторное применение» по ISO 15223-1;
- символ «Не стерильно» по ISO 15223-1;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению» по ISO 15223-1;
- символ «Уполномоченный представитель в Европейском сообществе» по ISO 15223-1, с указанием наименования и адреса уполномоченного представителя производителя;
- логотип производителя;
- символ «Изготовитель» по ISO 15223-1, с указанием наименования, адреса и телефона производителя.

Примечание:

Если значение номинальной длины изделия не содержит десятичных знаков, то на маркировке на поверхности изделия и на основной этикетке номинальная длина выражена целым числом.

г) Дополнительная этикетка с основными сведениями о медицинском изделии крепится на внешнем слое индивидуальной упаковки изделия. Этикетка выполняется на русском языке и содержит следующие сведения:

- наименование и типоразмер изделия;
- номер и дата регистрационного удостоверения на медицинское изделие (после государственной регистрации медицинского изделия в Российской Федерации);
- символ «Изготовитель» по ISO 15223-1, с указанием наименования и адреса производителя;
- наименование, адрес и телефон уполномоченного представителя производителя в Российской Федерации.

д) Этикетка на внешней (транспортной) упаковке изделия содержит следующие сведения:

- количество упаковок/общее количество упаковок данного заказа;
- наименование государства-получателя;
- количество изделий в упаковке;
- габаритные размеры упаковки;
- масса нетто изделий;
- масса брутто изделий;
- символ «Изготовитель» по ISO 15223-1, с указанием наименования, адреса и телефона производителя;
- логотип производителя;
- символ «Температурный диапазон» по ISO 15223-1, с указанием соответствующего диапазона климатических значений транспортирования и хранения изделия;
- символ «Диапазон влажности» по ISO 15223-1, с указанием максимального значения относительной влажности воздуха;
- символ «Не допускать воздействия солнечного света» по ISO 15223-1;
- символ «Не допускать воздействия влаги» по ISO 15223-1;
- манипуляционные знаки «Верх» и «Предел по количеству ярусов в штабеле».

5.2. Упаковка медицинского изделия

Индивидуальная упаковка изделия не предназначена для стерилизации. Для того чтобы стерилизовать изделие перед применением потребителю следует извлечь его из всех заводских упаковок и упаковать в соответствии с инструкциями по стерилизации, приведенными в эксплуатационной документации.

Изделия в количестве 1 штука упаковываются в индивидуальную упаковку – бумажно-полиэтиленовые пакеты, которые с лицевой стороны изготовлены из прозрачной композитной пленки (полиэтилентерефталат (PET)/литьевой полипропилен (CPP)), с обратной стороны – из глазированной бумаги марки Б 60 г белого цвета.

На непрозрачной стороне бумажно-полиэтиленового пакета нанесена надпись «mindray».

Ширина бумажно-полиэтиленовых пакетов (внешний размер): от 55,00 до 75,00 мм. Длина бумажно-полиэтиленовых пакетов достаточна для полного упаковывания изделия соответствующей длины. Бумажно-полиэтиленовый пакет закрывается при помощи термической запайки. Ширина закрывающего шва: не менее 8,00 мм.

Изделия малых размеров и изделия с острыми частями (кромками, концами, гранями) перед укладкой в индивидуальную упаковку помещаются в блистер из прозрачной формованной

полиэтилентерефталатной пленки толщиной от 0,50 до 1,00 мм. Длина блистера: не более 60,00 мм. Ширина блистера: не более 40,00 мм.

Изделия в необходимом количестве оборачиваются в полиэтиленовую пленку или укладываются полиэтиленовый в пакет, а затем помещаются во внешнюю (транспортную) упаковку, изготовленную из ячеистого картона толщиной 3; 5 или 7 мм ($\pm 1,0$ мм). В упаковку также вкладывается упаковочный лист с указанием наименования, количества и номера партии изделия. Свободное пространство внутри упаковки заполняется прокладками из вспененного полиэтилена и/или вспененного полиуретана и/или двухслойной полимерной воздушно-пузырьковой пленки, которые препятствуют непреднамеренному перемещению изделий внутри упаковки, и защищают изделия от механических воздействий в процессе транспортирования. Внешняя упаковка с изделиями оклеивается полиэтиленовой лентой с липким слоем.

Масса брутто транспортной коробки: не более 25 кг.

5.3. Комплект поставки медицинского изделия

В комплект поставки медицинского изделия входит винт для остеосинтеза нестерильный одного варианта исполнения и одного типоразмера, инструкция по применению, а также, по заказу потребителя, один экземпляр паспорта на транспортную упаковку (перечень вариантов исполнения и типоразмеров медицинского изделия, с указанием комплекта поставки приведен в Приложении А).

6. Техническое обслуживание и ремонт

Винты для остеосинтеза нестерильные являются изделиями однократного применения.

Изделия не подлежат техническому обслуживанию и ремонту в процессе эксплуатации.

В случае обнаружения любых неисправностей такие изделия не следует использовать на пациенте, их следует утилизировать.

После извлечения изделия из тела пациента такое изделие нельзя использовать повторно, его следует утилизировать в соответствии с местными регламентами.

7. Перечень применяемых стандартов

Перечень применяемых стандартов, которым соответствует медицинское изделие:

Номер стандарта	Наименование стандарта
EN ISO 13485:2016	Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования
ISO 14971:2019	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
ISO 14644-1:2015	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц
ISO 14644-2:2015	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 2. Текущий контроль для подтверждения постоянного соответствия чистоты воздуха по концентрации частиц
ISO 19227-2018	Имплантаты для хирургии. Чистота ортопедических имплантатов. Общие требования
ISO 10993-1:2018	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска
ISO 15223-1:2016	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования
EN 1041:2008+A1:2013	Изделия медицинские. Информация, предоставляемая изготовителем
ISO 14630:2012	Имплантаты хирургические неактивные. Общие требования
ISO 5832-3:2016	Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 3. Деформируемый сплав на основе титана, 6-алюминия и 4-ванадия
IEC 62366-1	Изделия медицинские. Часть 1. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности

Приложение А.
Наименование медицинского изделия

Наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению; комплект поставки), с указанием товарного знака и иных средств индивидуализации медицинского изделия в случае их нанесения на упаковку медицинского изделия

**Винты для остеосинтеза нестерильные
варианты исполнения:**

- 1. Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, в составе:**
 - 1.1. Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм, длина: 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0 мм – 1 шт.
 - 1.2. Инструкция по применению – 1 шт.
 - 1.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 2. Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, в составе:**
 - 2.1. Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм, длина: 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0; 66,0; 68,0 мм – 1 шт.
 - 2.2. Инструкция по применению – 1 шт.
 - 2.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 3. Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, в составе:**
 - 3.1. Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм – 1 шт.
 - 3.2. Инструкция по применению – 1 шт.
 - 3.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 4. Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, в составе:**
 - 4.1. Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм, длина: 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0; 66,0; 68,0; 70,0 мм – 1 шт.
 - 4.2. Инструкция по применению – 1 шт.
 - 4.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 5. Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, в составе:**
 - 5.1. Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм, длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0 мм – 1 шт.
 - 5.2. Инструкция по применению – 1 шт.
 - 5.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 6. Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, в составе:**
 - 6.1. Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0 мм – 1 шт.
 - 6.2. Инструкция по применению – 1 шт.
 - 6.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 7. Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, в составе:**
 - 7.1. Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм, длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм – 1 шт.
 - 7.2. Инструкция по применению – 1 шт.
 - 7.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 8. Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, в составе:**
 - 8.1. Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм, длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм – 1 шт.

8.2. Инструкция по применению – 1 шт.

8.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

9. Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, в составе:

9.1. Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм, длина: 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0 мм – 1 шт.

9.2. Инструкция по применению – 1 шт.

9.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

10. Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, в составе:

10.1. Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм – 1 шт.

10.2. Инструкция по применению – 1 шт.

10.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

11. Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, в составе:

11.1. Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм, длина: 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0; 66,0; 68,0; 70,0; 72,0; 74,0; 76,0; 78,0; 80,0; 82,0; 84,0; 86,0; 88,0; 90,0; 92,0; 94,0; 96,0; 98,0; 100,0 мм – 1 шт.

11.2. Инструкция по применению – 1 шт.

11.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

12. Винт блокирующий, канюлированный, в составе:

12.1. Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм, длина: 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0; 135,0 мм – 1 шт.

12.2. Инструкция по применению – 1 шт.

12.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

13. Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, в составе:

13.1. Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм, длина: 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0 мм – 1 шт.

13.2. Инструкция по применению – 1 шт.

13.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

14. Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, в составе:

14.1. Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина: 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 мм – 1 шт.

14.2. Инструкция по применению – 1 шт.

14.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

15. Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, в составе:

15.1. Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0 мм – 1 шт.

15.2. Инструкция по применению – 1 шт.

15.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

16. Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, в составе:

16.1. Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм, длина: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0 мм – 1 шт.

16.2. Инструкция по применению – 1 шт.

16.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

17. Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, в составе:

17.1. Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0 мм – 1 шт.

17.2. Инструкция по применению – 1 шт.

17.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

- 18. Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, в составе:**
18.1. Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм, длина: 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 мм – 1 шт.
18.2. Инструкция по применению – 1 шт.
18.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 19. Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, в составе:**
19.1. Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0 мм – 1 шт.
19.2. Инструкция по применению – 1 шт.
19.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 20. Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, в составе:**
20.1. Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм – 1 шт.
20.2. Инструкция по применению – 1 шт.
20.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 21. Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, в составе:**
21.1. Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм, длина: 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0 мм – 1 шт.
21.2. Инструкция по применению – 1 шт.
21.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 22. Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, в составе:**
22.1. Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина: 20,0; 25,0; 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0 мм – 1 шт.
22.2. Инструкция по применению – 1 шт.
22.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 23. Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, в составе:**
23.1. Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм, длина: 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм – 1 шт.
23.2. Инструкция по применению – 1 шт.
23.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 24. Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, в составе:**
24.1. Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм, длина: 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм – 1 шт.
24.2. Инструкция по применению – 1 шт.
24.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 25. Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, в составе:**
25.1. Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 мм – 1 шт.
25.2. Инструкция по применению – 1 шт.
25.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).
- 26. Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, в составе:**
26.1. Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 мм – 1 шт.
26.2. Инструкция по применению – 1 шт.
26.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

27. Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, в составе:

27.1. Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 55,0; 60,0 мм – 1 шт.

27.2. Инструкция по применению – 1 шт.

27.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

28. Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, в составе:

28.1. Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 35,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 45,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 55,0; 56,0; 58,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0 мм – 1 шт.

28.2. Инструкция по применению – 1 шт.

28.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

29. Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, в составе:

29.1. Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм, длина: 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0 мм – 1 шт.

29.2. Инструкция по применению – 1 шт.

29.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

30. Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, в составе:

30.1. Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0 мм – 1 шт.

30.2. Инструкция по применению – 1 шт.

30.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

31. Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, в составе:

31.1. Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0 мм – 1 шт.

31.2. Инструкция по применению – 1 шт.

31.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

32. Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, в составе:

32.1. Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм, длина: 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0 мм – 1 шт.

32.2. Инструкция по применению – 1 шт.

32.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

33. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, в составе:

33.1. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0 мм – 1 шт.

33.2. Инструкция по применению – 1 шт.

33.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

34. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, в составе:

34.1. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0 мм – 1 шт.

34.2. Инструкция по применению – 1 шт.

34.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

35. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, в составе:

35.1. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 45,0; 46,0; 48,0; 50,0; 55,0; 60,0 мм – 1 шт.

35.2. Инструкция по применению – 1 шт.

35.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

36. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, в составе:

36.1. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 45,0; 46,0; 48,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0; 135,0; 140,0; 145,0; 150,0 мм – 1 шт.

36.2. Инструкция по применению – 1 шт.

36.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

37. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, в составе:

37.1. Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм, длина: 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0; 52,0; 54,0; 56,0; 58,0; 60,0; 62,0; 64,0; 66,0; 68,0; 70,0; 72,0; 76,0; 80,0; 85,0; 90,0 мм – 1 шт.

37.2. Инструкция по применению – 1 шт.

37.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

38. Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, в составе:

38.1. Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0 мм – 1 шт.

38.2. Инструкция по применению – 1 шт.

38.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

39. Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, в составе:

39.1. Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм, длина: 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм – 1 шт.

39.2. Инструкция по применению – 1 шт.

39.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

40. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, в составе:

40.1. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0 мм – 1 шт.

40.2. Инструкция по применению – 1 шт.

40.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

41. Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, в составе:

41.1. Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм, длина: 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0; 28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 44,0; 46,0; 48,0; 50,0 мм – 1 шт.

41.2. Инструкция по применению – 1 шт.

41.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

42. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, в составе:

42.1. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина: 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0 мм – 1 шт.

42.2. Инструкция по применению – 1 шт.

42.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

43. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, в составе:

43.1. Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм, длина: 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0; 135,0; 140,0; 145,0; 150,0 мм – 1 шт.

43.2. Инструкция по применению – 1 шт.

43.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

44. Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, в составе:

44.1. Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм, длина: 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0 мм – 1 шт.

44.2. Инструкция по применению – 1 шт.

44.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

45. Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, в составе:

45.1. Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм, длина: 8,0; 10,0; 12,0; 14,0 мм – 1 шт.

45.2. Инструкция по применению – 1 шт.

45.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

46. Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, в составе:

46.1. Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0 мм – 1 шт.

46.2. Инструкция по применению – 1 шт.

46.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

47. Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, в составе:

47.1. Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм, длина: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0 мм – 1 шт.

47.2. Инструкция по применению – 1 шт.

47.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

48. Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, в составе:

48.1. Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм, длина: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0 мм – 1 шт.

48.2. Инструкция по применению – 1 шт.

48.3. Паспорт – 1 шт./трансп. уп. (при необходимости).

Приложение Б.
Данные о механической прочности винтов

Б.1. Механическая прочность винтов

Винты имеют специальную конструкцию, поэтому нормированные величины разрывающего крутящего момента и угла поворота до разрушения костного винта, определяемые стандартизированными методами, классифицированы в зависимости от конструкции конкретного винта и его диаметра.

Таблица Б.1 – Разрывающий крутящий момент и угол поворота до разрушения винта

Наименование изделия	Минимальный крутящий момент на разрыв	Минимальный угол поворота при повреждении
Винт кортикальный MR, диаметр 1,5 мм	0,16 Н·м	80°
Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм	0,16 Н·м	80°
Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 1,5 мм	0,16 Н·м	80°
Винт самосверлящий самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм	0,30 Н·м	80°
Винт самонарезающий, кортикальный, диаметр 2,0 мм	0,30 Н·м	80°
Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,0 мм	0,30 Н·м	80°
Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,4 мм	0,60 Н·м	80°
Винт кортикальный, диаметр 2,5 мм	0,90 Н·м	90°
Винт кортикальный, диаметр 2,7 мм	0,80 Н·м	90°
Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 2,7 мм	0,80 Н·м	90°
Винт кортикальный, диаметр 3,5 мм	2,40 Н·м	90°
Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 3,5 мм	2,40 Н·м	90°
Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм	1,10 Н·м	90°
Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 4,0 мм	1,10 Н·м	90°
Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм	1,10 Н·м	90°
Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, диаметр 4,0 мм	1,10 Н·м	90°
Винт кортикальный, диаметр 4,5 мм	3,40 Н·м	150°
Винт самонарезающий, кортикальный MR, диаметр 4,5 мм	3,40 Н·м	150°
Винт спонгиозный, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм	3,00 Н·м	90°
Винт спонгиозный MR, с резьбой по всей длине, диаметр 6,5 мм	3,00 Н·м	90°
Винт спонгиозный, с неполной резьбой, диаметр 6,5 мм	3,00 Н·м	90°
Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 16,0 мм, диаметр 6,5 мм	3,00 Н·м	90°
Винт спонгиозный MR, с неполной резьбой, с длиной резьбы 32,0 мм, диаметр 6,5 мм	3,00 Н·м	90°
Винт блокирующий MR, диаметр 1,5 мм	0,12 Н·м	30°
Винт блокирующий MR, диаметр 2,0 мм	0,27 Н·м	30°
Винт блокирующий, самонарезающий, диаметр 2,0 мм	0,27 Н·м	30°
Винт блокирующий MR, диаметр 2,4 мм	0,70 Н·м	80°

Наименование изделия	Минимальный крутящий момент на разрыв	Минимальный угол поворота при повреждении
Винт блокирующий самонарезающий, диаметр 2,4 мм	0,72 Н·м	100°
Винт блокирующий, диаметр 2,7 мм	1,20 Н·м	100°
Винт блокирующий MR, диаметр 2,7 мм	1,20 Н·м	100°
Винт блокирующий, диаметр 3,5 мм	2,00 Н·м	100°
Винт блокирующий MR, диаметр 3,5 мм	2,00 Н·м	100°
Винт блокирующий, диаметр 5,0 мм	6,00 Н·м	120°
Винт блокирующий MR, диаметр 5,0 мм	6,00 Н·м	120°
Винт блокирующий, канюлированный, диаметр 6,5 мм	5,00 Н·м	60°
Винт блокирующий, канюлированный MR, диаметр 6,5 мм	5,00 Н·м	60°
Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,4 мм	0,70 Н·м	80°
Винт блокирующий, самонарезающий MR-VA, диаметр 2,7 мм	1,20 Н·м	100°
Винт компрессионный, без головки, диаметр 3,0 мм	0,25 Н·м	88°
Винт канюлированный, диаметр 3,5 мм	0,33 Н·м	86°
Винт канюлированный, диаметр 4,5 мм	0,70 Н·м	84°
Винт компрессионный, без головки, диаметр 4,5 мм	0,74 Н·м	99°
Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 6,5 мм	2,92 Н·м	20°
Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 6,5 мм	15,54 Н·м	986°
Винт канюлированный, конический MR, диаметр 6,5 мм	2,14 Н·м	55°
Винт канюлированный, с длинной резьбой, диаметр 7,5 мм	14,99 Н·м	773°
Винт канюлированный, с короткой резьбой, диаметр 7,5 мм	15,07 Н·м	1215°
Винт стягивающий DHS/DCS, диаметр 12,0 мм	29,78 Н·м	1970°

Сертификат

/Логотип: ССРГТ

Китайский комитет содействия международной торговле/

**Китайский комитет содействия международной торговле
Международная торговая палата Китая**

0239(неразборчиво)

Китайский комитет содействия международной торговле
Международная торговая палата Китая

/Логотип
ССРПТ/

Сертификат

QR-код
Номер № 244201A0/002365

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ЧТО: печать компании «Ухань Майндрэй Саянэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.), на приложенном ДОКУМЕНТЕ является подлинной.

/Печать: Китайский комитет содействия
международной торговле
Сертификация
Специальная печать для коммерческих
сертификатов
ССРПТ
(25)/

ССРПТ

ССОИС

/Выпуклая печать:
Китайский комитет содействия
международной
торговле
Сертификация
Специальная печать
для коммерческих сертификатов
ССРПТ
(25)/

Китайский комитет содействия
международной торговле
/Печать: Китайский комитет содействия
международной торговле
Сертификация
Специальная печать для коммерческих
сертификатов
ССРПТ
(25)/

Полномочная подпись: /Подпись: Луо Лидан
(Luo Lidan)/
Дата: 08 октября 2024 года

Веб-сайт для проверки сертификата: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

/Логотип: Майндрэй (Mindray)/

2024-09-24

Тем, кого это может касаться,

Декларация

Мы, Компания «Ухань Майндрэй Саяэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.), производитель следующего медицинского изделия:

Винты для остеосинтеза нестерильные

настоящим заявляем, что

1. приложенное содержимое с титульным листом на документе **«ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ПАСПОРТ медицинского изделия Винты для остеосинтеза нестерильные»** используется для регистрации медицинского изделия в России; этот файл содержит основную информацию о медицинском изделии, технические характеристики и гарантии производителя.
2. приложенное содержимое используется только для регистрации медицинского изделия в России, и требуется для нотариального подтверждения в соответствии с официальными российскими правилами.

/Печать: Китайский
комитет содействия
международной
торговле
Сертификация
Специальная печать
для коммерческих
сертификатов
ССРП
(25)/

Искренне Ваш,

/Подпись: Гуань Чжияон (Guan Zhiyong)/
Господин Гуань Чжияон (Guan Zhiyong)
Заместитель Генерального Директора Компании
«Ухань Майндрэй Саяэнтифик Ко., Лтд.»
(Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)

/Печать: «Ухань Майндрэй
Саяэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan
Mindray Scientific Co., Ltd.)
42011110036965/

Компания «Ухань Майндрэй Саяэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)
Адрес: No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065, Hubei Province, Китайская Народная Республика
Телефон: +86-27-88309090
Факс: +86-27-88309082
Веб-сайт: www.mindray.com

/Логотип: Майндрэй (Mindray)/

No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065, Hubei Province, Китайская Народная
Республика
Телефон: +86-27-88309090,
Факс: +86-27-88309082
<http://www.mindray.com>


/ Печать: «Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко.,
Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)
42011110036965/

/Подпись Гуань Чжюнь (Guan Zhiyong)/

/Текст на английском языке с переводом на русский язык/

/Печать: Китайский комитет содействия
международной торговле
Сертификация
Специальная печать для
коммерческих сертификатов
ССРП
(25)/

Перевод данного текста выполнен переводчиком Малюшовой Анной Андреевной

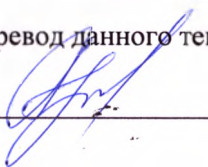

Российская Федерация
Город Москва
Десятого октября две тысячи двадцать четвертого года

Я, Веремий Юлия Игоревна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Малюшовой Анны Андреевны.
Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2194-н/77-2024-12-3/32

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Ю. И. Веремий



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 116 лист(а)(ов)

Нотариус

