

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Формула-ФР»

Прижегодская Т.В.



«18»

Прижегодская

2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

*Прибор для измерения артериального давления автоматический
(Тонометр) MediCare®, варианты исполнения*



Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонометр) MediCare®, модель BP-805, в составе: Тонометр, манжета и сетевой адаптер



Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонометр) MediCare®, модель BP-805 – вид спереди



Набор для измерения артериального давления автоматический (Тонометр) MediCare®, модель BP-805 – вид снизу

Манжета





Элементы питания (тип AA)



Сетевой адаптер

MEDCARE®

Модель: BP-805

Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонометр)



ТОЧНО. БЫСТРО. УДОБНО.



Память для двух
пользователей
по 60 измерений



Интеллектуальная
система управления
Intellisense



Функция
настройки
даты и времени



Индикатор
аритмии

Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонометр) MediCare®, модель BP-805 –
упаковка, вид спереди

Технические характеристики

Погрешность измерений:	± 3 мм рт. ст./ $\pm 0,4$ кПа (артериальное давление) $\pm 5\%$ (пульс)
Нагнетание:	автоматическое нагнетание
Предупреждение о низком заряде:	если раздается сигнал, необходимо заменить батарею (менее $4,3 \text{ В} \pm 0,2 \text{ В}$)
Автоматическое отключение:	150 сек бездействия
Разъем питания:	5,5 мм наружный диаметр, 2,1 мм внутренний диаметр
Напряжение:	Вход: AC 100-240В~50/60 Гц, макс. ток 500 мА; Выход: DC 5.9В
Адаптер	AC/DC: DC 5.9В/1А
Номинальная мощность:	5.9 Вт — — —
Источник питания:	батарея 4 x 1,5 В «АА» (LR6)
Размеры прибора:	134 x 101 x 46 мм
Вес:	около 470 г (включая батареи и манжету)

Условия эксплуатации: при температуре от 5°C до 40°C и относительной влажности воздуха от 15% до 80%.

Условия хранения и транспортировки: при температуре от -20°C до 50°C и относительной влажности воздуха от 10 % до 93 %.

Срок годности: не ограничен. **Срок службы:** 5 лет.

Регистрационное удостоверение № _____ **от** _____

Производитель: «Л-Так МедиКеа Пте. Лтд.», Сингапур,
«L-Tac MediCare Pte. Ltd.», 25 Mandai Estate, #07-11,
Innovation Place Tower 1, Singapore 729930

Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий:
ООО «Формула-ФР», 109443, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 139,
офис 10

**По вопросам гарантийного и сервисного
обслуживания на территории РФ**

**необходимо обращаться по телефону
горячей линии:** _____





ФУНКЦИЯ НАПОМИНАНИЯ

Позволяет установить два предупреждающих сигнала на определенное время.



РАБОТА ОТ БАТАРЕЕК ИЛИ СЕТЕВОГО АДАПТЕРА

Прибор может работать как от батареек (4 батарейки АА в комплекте) или от сетевого адаптера (в комплекте).




РЕГУЛИРУЕМЫЙ РАЗМЕР МАНЖЕТЫ

Обхват манжеты легко регулируется и подходит для обхвата руки размером 22-32 см.



ШКАЛА ВОЗ НА КОРПУСЕ

Удобство анализа измерений при помощи шкалы ВОЗ нанесенной на боковой части корпуса дисплея.

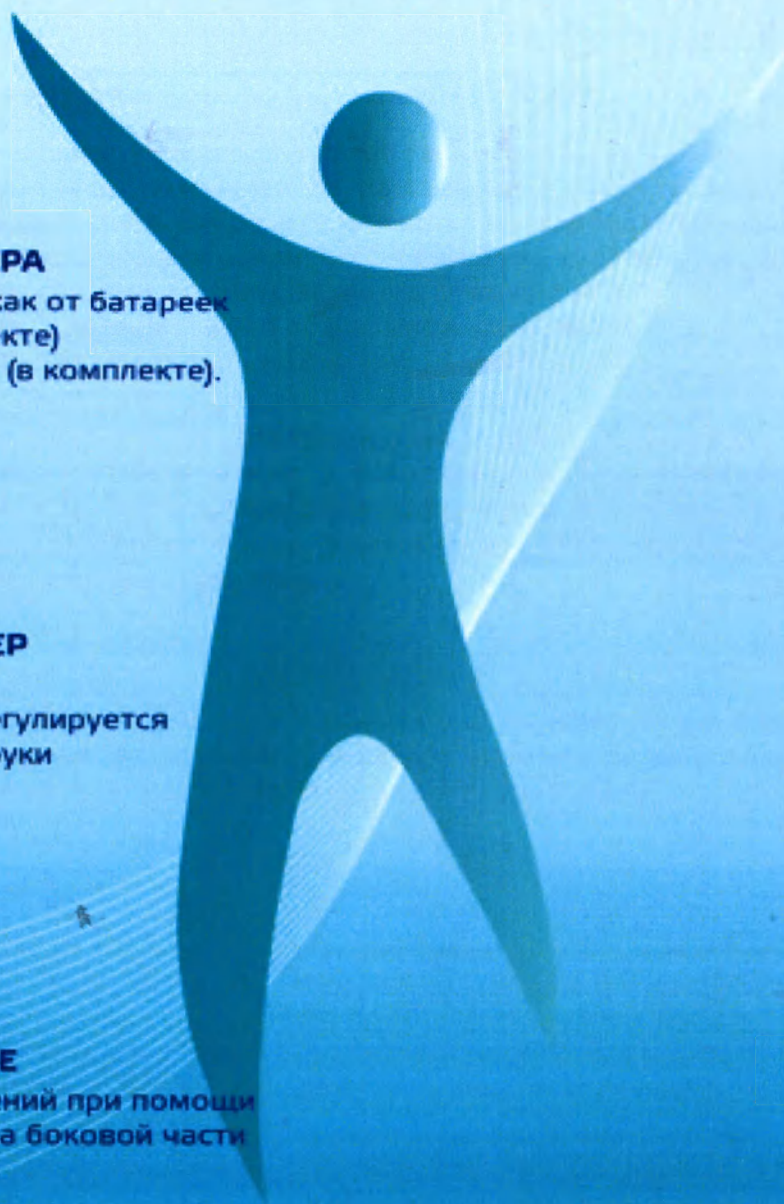


Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонометр) MediCare®, модель BP-805 – упаковка, вид сбоку




Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонометр) MediCare®, модель BP-805, в составе:

- Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонометр) MediCare®, модель BP-805 – 1 шт.;
- Манжета, тип ACMNP-1 – 1 шт.;
- Элементы питания (тип AA) – 4 шт.;
- Сетевой адаптер, модель M059100-A005EU – 1 шт.;
- Руководство пользователя – 1 шт.


Подготовка к измерению:

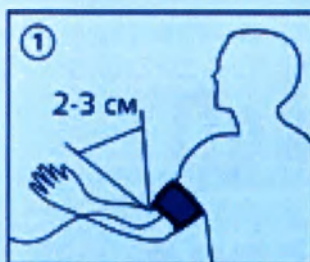

Расположите манжету на руке таким образом, чтобы ее нижний край находился на расстоянии на 2-3 см выше локтевого сгиба. Закрепите манжету при помощи застежки на липучке таким образом, чтобы вам было удобно, а также, чтобы манжета не была затянута слишком туго. При этом манжета должна плотно обхватывать руку, иначе результат измерения может быть не верным.

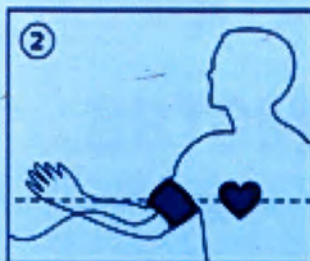

Расположите руку ладонью вверх так, чтобы точка входа воздушной трубки в манжету располагалась над локтевой ямкой. Немного поддерживайте руку, чтобы манжета располагалась на уровне сердца. Следите за тем, чтобы воздушная трубка не перекручивалась.

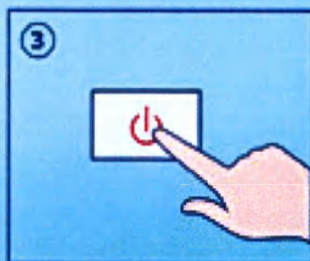

Нажмите кнопку «старт» и встроенный компрессор автоматически начнет накачивать воздух в манжету до величины давления, необходимой для проведения измерения.

Меры предосторожности:

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя. Не оставляйте прибор без присмотра в присутствии детей или лиц, не отвечающих за свои действия.

Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонометр) MediCare®, модель BP-805 – упаковка, вид сзади



**Прибор для измерения
артериального давления
автоматический (Тонометр),
модель BP-805**

Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонометр) MediCare®, модель BP-805 –
упаковка, вид сверху



Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонومتر) MediCare®, модель BP-806, в составе: Тонومتر, манжета и сетевой адаптер




Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонометр) MediCare®, модель BP-806 – вид спереди



Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонومتر) MediCare®, модель BP-806 – вид снизу

Манжета



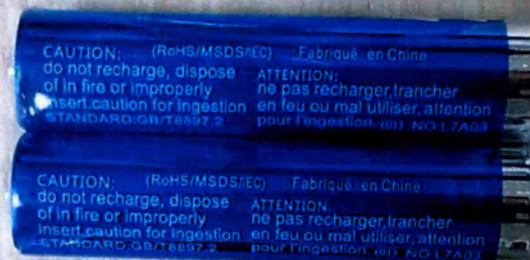

Элементы питания (тип AAA)



Сетевой адаптер

MEDCARE

Модель: BP-806

Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонометр)



Память для двух
пользователей
по 60 измерений



Большой экран
с индикатором даты,
времени, влажности и
температуры помещения



Индикатор
ритма



Интеллектуальная
система управления
Intelligence

**ТОЧНО
БЫСТРО
УДОБНО**



Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонометр) MediCare®, модель BP-806 – упаковка, вид спереди



Технические характеристики

Погрешность измерений:	± 3 мм рт. ст./ $\pm 0,4$ кПа (артериальное давление) $\pm 5\%$ (пульс)
Нагнетание:	автоматическое нагнетание
Предупреждение о низком заряде:	если раздается сигнал, необходимо заменить батарею (менее $4,3 \text{ В} \pm 0,2 \text{ В}$)
Автоматическое отключение:	150 сек бездействия
Разъем питания:	5,5 мм наружный диаметр, 2,1 мм внутренний диаметр
Напряжение:	Вход: AC 100-240В-50/60 Гц, макс. ток 500 мА; Выход: DC 5.9В
Адаптер	AC/DC: DC 5.9В/1А
Номинальная мощность:	5.9 Вт — — —
Источник питания:	батарея 4 x 1,5 В «AAA» (LR03)
Размеры прибора:	115 x 125 x 150 мм
Вес:	примерно 561 г (включая батареи и манжету)

Условия эксплуатации: при температуре от 5°C до 40°C и относительной влажности воздуха от 15% до 80%.

Условия хранения и транспортировки: при температуре от -20°C до 50°C и относительной влажности воздуха от 10% до 93%.

Срок годности: не ограничен. **Срок службы:** 5 лет.

Регистрационное удостоверение № _____ **от** _____

Производитель: «Л-Так МедиКеа Пте. Лтд.», Сингапур, «L-Tac MediCare Pte. Ltd.»,
25 Mandai Estate, #07-11, Innovation Place Tower 1, Singapore 729930

Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Формула-ФР», 109443,
г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 139, офис 10

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания на территории РФ необходимо обращаться по телефону горячей линии: _____



Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонометр) MediCare®, модель BP-806 – упаковка, вид сбоку

MEDCARE



ФУНКЦИЯ НАПОМИНАНИЯ

Позволяет установить предупреждающий звуковой сигнал на определенное время.



РАБОТА ОТ БАТАРЕЕК ИЛИ СЕТЕВОГО АДАПТЕРА

Прибор может работать как от батареек (4 батарейки AAA в комплекте) или от сетевого адаптера (в комплекте).



РЕГУЛИРУЕМЫЙ РАЗМЕР МАНЖЕТЫ

Обхват манжеты легко регулируется и подходит для обхвата руки размером 22-32 см.



ШКАЛА ВОЗ НА КОРПУСЕ

Удобство анализа измерений при помощи шкалы ВОЗ нанесенной на боковой части корпуса дисплея.




Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонометр) MediCare®, модель BP-806 – упаковка, вид сбоку


Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонометр) MediCare®, модель BP-806, в составе:

- 1. Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонометр) MediCare®, модель BP-806 – 1 шт.;
- Манжета, тип АСМНР-1 – 1 шт.;
- Элементы питания (тип ААА) – 4 шт.;
- Сетевой адаптер, модель M059100-A005EU – 1 шт.;
- Руководство пользователя – 1 шт.

Подготовка к измерению:

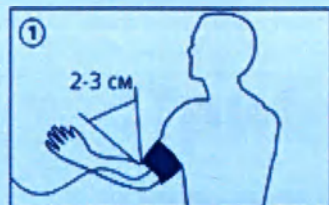

Расположите манжету на руке таким образом, чтобы ее нижний край находился на расстоянии на 2-3 см выше локтевого сгиба. Закрепите манжету при помощи застежки на липучке таким образом, чтобы вам было удобно, а также, чтобы манжета не была затянута слишком туго. При этом манжета должна плотно обхватывать руку, иначе результат измерения может быть не верным.

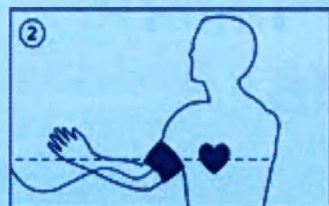

Расположите руку ладонью вверх так, чтобы точка входа воздушной трубки в манжету располагалась над локтевой ямкой. Немного поддерживайте руку, чтобы манжета располагалась на уровне сердца. Следите за тем, чтобы воздушная трубка не перекручивалась.



Нажмите кнопку «старт» и встроенный компрессор автоматически начнет накачивать воздух в манжету до величины давления, необходимой для проведения измерения.

Меры предосторожности:

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя. Не оставляйте прибор без присмотра в присутствии детей или лиц, не отвечающих за свои действия.

Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонометр) MediCare®, модель BP-806 – упаковка, вид сзади




**Прибор для измерения
артериального давления
автоматический
(Тонометр),
модель BP-806**

Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонометр) MediCare®, модель BP-806 – упаковка, вид сверху

Изображение русскоязычной маркировки нижней части прибора: вариант исполнения «Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонометр) MediCare®, модель BP-805»



Изображение русскоязычной маркировки нижней части прибора: варианта исполнения «Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонометр) MediCare®, модель BP-806»

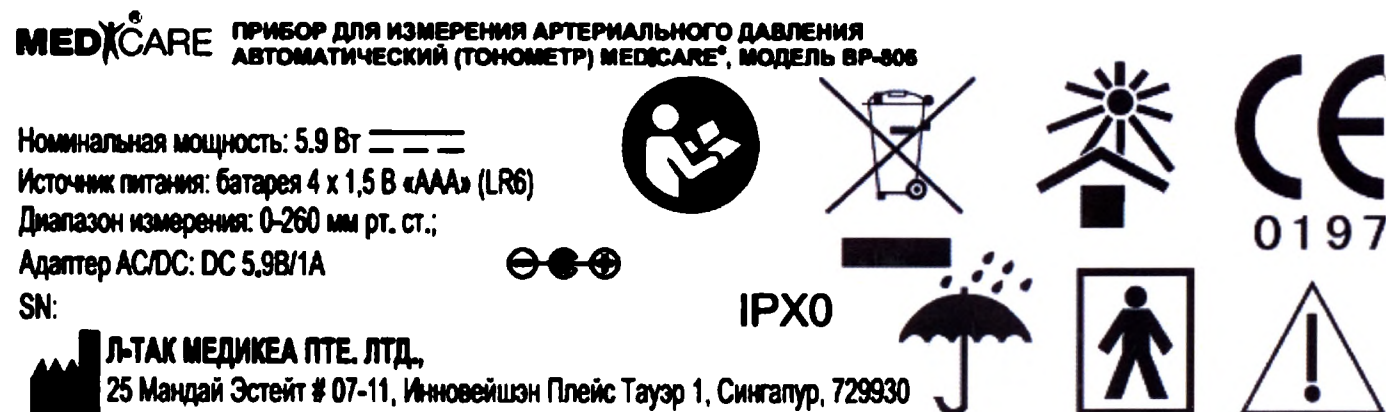

Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонометр) MediCare®, модель BP-805

РУ № РЗН ____ / ____ от ____

Производитель:

«Л-Так МедиКеа Пте. Лтд.» (L-Tac MediCare Pte. Ltd.), 25
Mandai Estate, #07-11, Innovation Place Tower 1,
Singapore 729930 (Сингапур)

E-mail: enquiries@medicare-l-tac.com.sg

Условия хранения и транспортирования:

Температура: от -20°C до +50°C

Относительная влажность: от 10% до 93%

Дата производства и номер партии: см. на упаковке

Импортёр/Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Формула-ФР», 109443, г. Москва, Волгоградский
пр-кт, д. 139, офис 10, тел.: +7 (926) 208-71-61

E-mail: formula_fr@fastmail.com



Русскоязычная маркировка транспортной упаковки Прибора для измерения артериального давления автоматического (Тонометр) MediCare®, модель BP-805

Прибор для измерения артериального давления автоматический (Тонометр) MediCare®, модель BP-806

РУ № РЗН ____ / ____ от ____

Производитель:

«Л-Так МедиКеа Пте. Лтд.» (L-Tac MediCare Pte. Ltd.), 25
Mandai Estate, #07-11, Innovation Place Tower 1,
Singapore 729930 (Сингапур)

E-mail: enquiries@medicare-l-tac.com.sg

Условия хранения и транспортирования:

Температура: от -20°C до +50°C

Относительная влажность: от 10% до 93%

Дата производства и номер партии: см. на упаковке

Импортёр/Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Формула-ФР», 109443, г. Москва, Волгоградский
пр-кт, д. 139, офис 10, тел.: +7 (926) 208-71-61

E-mail: formula_fr@fastmail.com



Прошито и пронумеровано

26 (лист 06)



Стриж