

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «УКО РЕАБИЛИТИ-РЕФЛЕКС»



Януто А.Н.

2024 г.

ТАМПОН АНАЛЬНЫЙ

REFLEX

по ТУ 32.50.50-015-49198195-2024

Фотографические изображения медицинского изделия

Медицинское изделие

Тампон анальный Reflex малый (диаметр 37 мм) по ТУ 32.50.50-015-49198195-2024



Тампон анальный Reflex большой (диаметр 45 мм) по ТУ 32.50.50-015-49198195-2024



Индивидуальная маркировка изделия

Маркировка на индивидуальной упаковке изделия: «Тампон анальный Reflex малый (диаметр 37 мм) по ТУ 32.50.50-015-49198195-2024»:

РУ № _____ / _____ от _____			
Тампон анальный Reflex по ТУ 32.50.50-015-49198195-2024			
Малый			
Диаметр тампона в активированном состоянии 37 мм			
			
ООО «УКО РЕАБИЛИТИ-РЕФЛЕКС»			
	108821, г. Москва, вн.тер.г. поселение Филимонковское, ул. Усадебный Парк, д. 1, помещение 9Н		
			

Маркировка на индивидуальной упаковке изделия: «Тампон анальный Reflex большой (диаметр 45 мм) по ТУ 32.50.50-015-49198195-2024»:

РУ № _____ / _____ от _____			
Тампон анальный Reflex по ТУ 32.50.50-015-49198195-2024			
Большой			
Диаметр тампона в активированном состоянии 45 мм			
			
ООО «УКО РЕАБИЛИТИ-РЕФЛЕКС»			
	108821, г. Москва, вн.тер.г. поселение Филимонковское, ул. Усадебный Парк, д. 1, помещение 9Н		
			

Групповая маркировка изделия

Маркировка на групповой упаковке изделия: «Тампон анальный Reflex малый (диаметр 37 мм) по ТУ 32.50.50-015-49198195-2024»:

РУ № _____ / _____ от _____	
Тампон анальный Reflex по ТУ 32.50.50-015-49198195-2024	
Малый	
Диаметр тампона в активированном состоянии 37 мм	
Количество индивидуальных упаковок 20 шт.	
	
ООО «УКО РЕАБИЛИТИ-РЕФЛЕКС»	
108821, г. Москва, вн.тер.г. поселение Филимонковское, ул. Усадебный Парк, д. 1, помещение 9Н	
	
	
	
	
	

Маркировка на групповой упаковке изделия: «Тампон анальный Reflex большой (диаметр 45 мм) по ТУ 32.50.50-015-49198195-2024»:

РУ № _____ / _____ от _____	
Тампон анальный Reflex по ТУ 32.50.50-015-49198195-2024	
Большой	
Диаметр тампона в активированном состоянии 45 мм	
Количество индивидуальных упаковок 20 шт.	
	
ООО «УКО РЕАБИЛИТИ-РЕФЛЕКС»	
108821, г. Москва, вн.тер.г. поселение Филимонковское, ул. Усадебный Парк, д. 1, помещение 9Н	
	
	
	
	
	

Транспортная упаковка изделия

Маркировка на транспортной упаковке изделия: «Тампон анальный Reflex малый (диаметр 37 мм) по ТУ 32.50.50-015-49198195-2024»:

ПУ № _____ / _____ от _____

Тампон анальный Reflex по ТУ 32.50.50-015-49198195-2024

Малый
Диаметр тампона в активированном состоянии 37 мм
Количество групповых упаковок 12 шт.
Упаковано _____
Габаритный размеры _____
Масса брутто _____

ООО «УКО РЕАБИЛИТИ-РЕФЛЕКС»
108821, г. Москва, вн.тер.г. поселение Филимонковское,
ул. Усадебный Парк, д. 1, помещение 9Н

Маркировка на транспортной упаковке изделия: «Тампон анальный Reflex большой (диаметр 45 мм) по ТУ 32.50.50-015-49198195-2024»:

ПУ № _____ / _____ от _____

Тампон анальный Reflex по ТУ 32.50.50-015-49198195-2024

Большой
Диаметр тампона в активированном состоянии 45 мм
Количество групповых упаковок 12 шт.
Упаковано _____
Габаритный размеры _____
Масса брутто _____

ООО «УКО РЕАБИЛИТИ-РЕФЛЕКС»
108821, г. Москва, вн.тер.г. поселение Филимонковское,
ул. Усадебный Парк, д. 1, помещение 9Н


      

Индивидуальная упаковка изделия

Индивидуальная упаковка изделия: «Тампон анальный Reflex малый (диаметр 37 мм) по ТУ 32.50.50-015-49198195-2024»:



Индивидуальная упаковка изделия: «Тампон анальный Reflex большой (диаметр 45 мм) по ТУ 32.50.50-015-49198195-2024»:

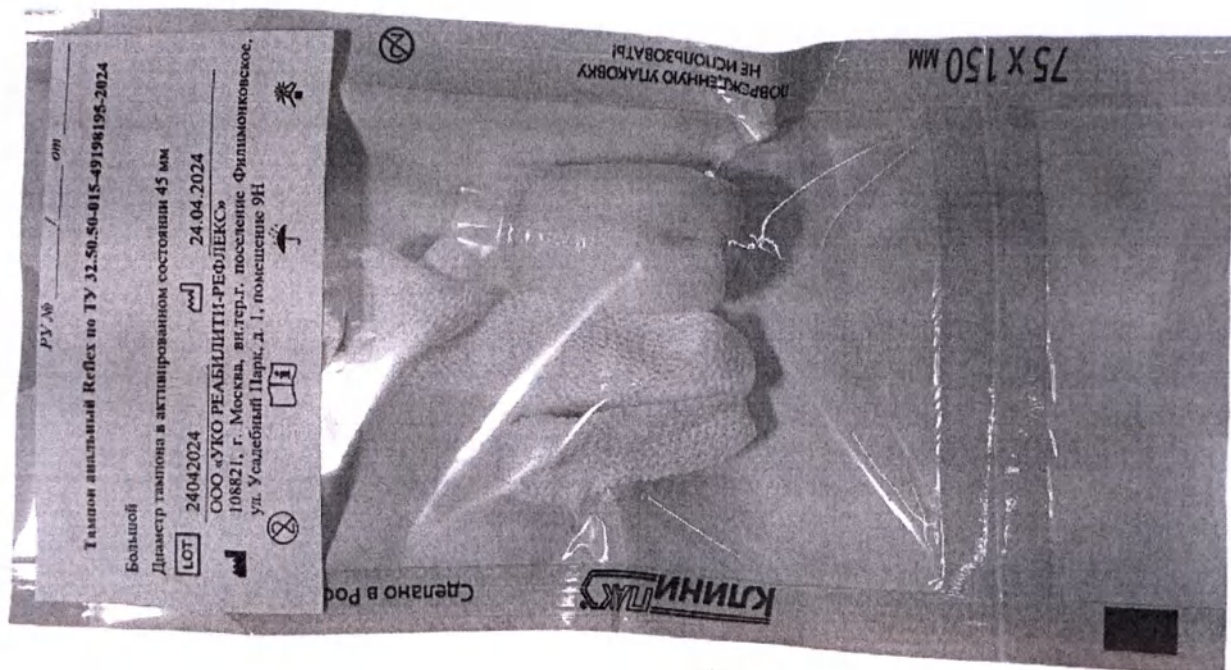


Групповая упаковка изделий:

«Тампон анальный Reflex малый (диаметр 37 мм) по ТУ 32.50.50-015-49198195-2024» и

«Тампон анальный Reflex большой (диаметр 45 мм) по ТУ 32.50.50-015-49198195-2024»:

Вариант 1 - Из материала «микрогофрокартон» типа «Е», марки «Т21» по ГОСТ Р 52901, цвет белый, производства ООО «Столичная печать»,

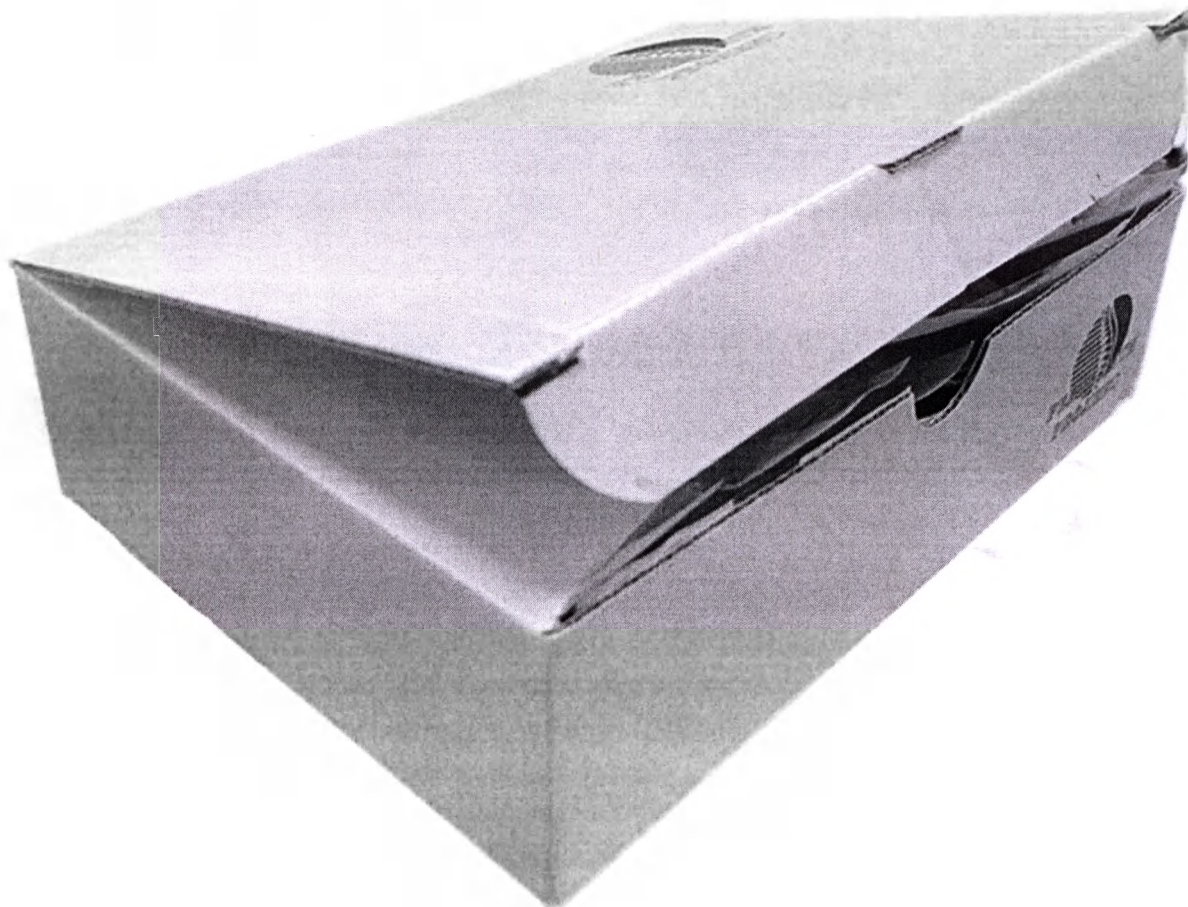

Вариант 2 - Комбинированная упаковка (бумага/пленка), производства ООО «КЛИНИПАК». Регистрационное удостоверение на упаковку № ФСР 2011/12874 от 04.09.2018 г., срок действия: бессрочно



Примечание:

В связи с необходимостью обеспечения надлежащей защиты и сохранности медицинского изделия при его транспортировке и хранении, сообщаем, что для групповой упаковки данного изделия применяются два равноценных варианта упаковки. Оба варианта являются приемлемыми и соответствуют установленным требованиям по безопасности и сохранности медицинских изделий.


Решение о выборе конкретного варианта упаковки осуществляется производителем и может зависеть от ряда факторов, в числе которых:

Индивидуальные требования клиентов: Заказчики могут иметь свои предпочтения или спецификации, связанные с упаковкой, которые должны быть учтены производителем.

Экономические соображения: Стоимость упаковки и логистические затраты также могут повлиять на выбор способа упаковки.

Производитель гарантирует, что независимо от выбранного варианта упаковки, все требования к безопасности и сохранности медицинских изделий будут соблюдены.

Транспортная упаковка изделия

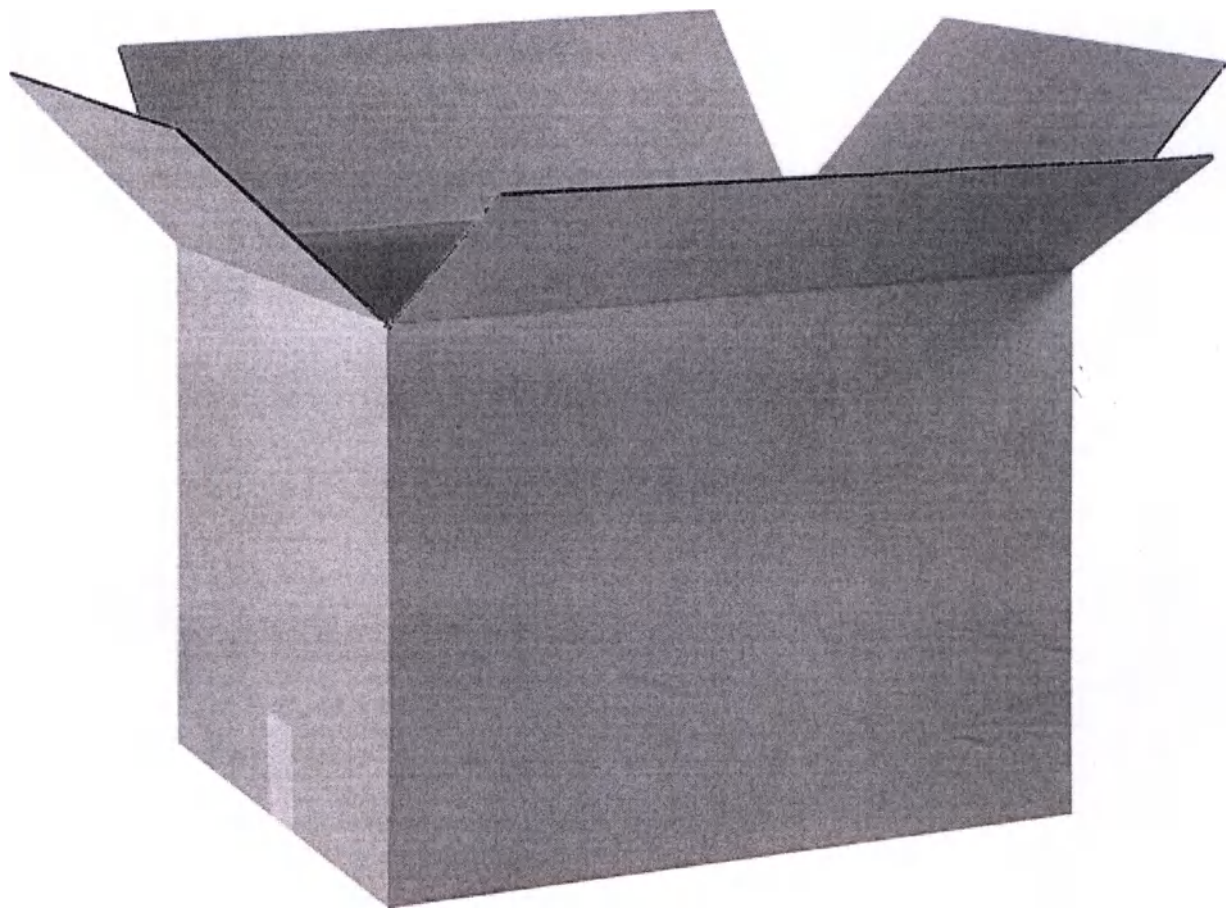

Инструкция-вкладыш



Reflex

Тампон анальный
по ТУ 32.50.50-015-49198195-2024

Инструкция по применению

Условия хранения

Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте. Избегать воздействия прямых солнечных лучей, не подвергать нагреванию и замораживанию.

Показания

Недержание кала и непроизвольное выделение газов из кишечника.

Противопоказания

Не следует использовать анальные тампоны Reflex при геморрое (3 или 4 степени), анальном стенозе.

Предупреждение

Компания «УКО РЕАБИЛИТИ-РЕФЛЕКС» не несет ответственности за любые телесные повреждения, а также иной ущерб, нанесенный в результате использования данного изделия с нарушением способа, рекомендованного компанией.

При нормальной чувствительности в ректальной области процесс привыкания к анальному тампону не занимает много времени. Как правило, у людей с пониженной или ослабленной чувствительностью не возникает проблем, связанных с привыканием.

Каловые массы должны быть твердыми и сформированными. Анальные тампоны бывают двух размеров. Размер тампона не может быть определен заранее. Следует попробовать тампоны обоих размеров и выбрать наиболее подходящий.

Некоторые пользователи, регулярно применяющие анальные тампоны, могут заметить, что иногда тампон может вытесниться из прямой кишки. Видимых причин подобной реакции нет, однако опыт показывает, что те же пользователи могут возобновить успешное использование тампонов после короткого перерыва.

Не рекомендуется применять анальные тампоны у детей младше 6 лет, так как анальный сфинктер недостаточно широк. Применение анальных тампонов у детей должно осуществляться под наблюдением взрослых после консультации со специалистом.

Меры предосторожности

Перед использованием данного продукта необходима консультация медицинского специалиста.

Перед первым использованием анального тампона Reflex следует обратиться к врачу для получения медицинской консультации по применению тампона.

Анальный тампон не следует использовать при диарее.

При попадании в рот анальный тампон увеличивается в объеме и может вызвать удушье.

При позывах к дефекации анальный тампон следует удалить.

При отсутствии чувствительности в ректальной области и позывов к дефекации замену тампона следует производить через равные промежутки времени в соответствии с рекомендациями.

Анальный тампон Reflex следует извлечь не позднее, чем через 12 часов после введения. В случае возникновения трудностей, связанных с извлечением анального тампона Reflex следует обратиться к специалисту.

Если при применении анального тампона вы постоянно ощущаете дискомфорт, применение тампонов следует прекратить и обратиться к врачу.

Хранить в недоступном для детей месте.

Внимание

Изделие предназначено для однократного применения, повторное использование может представлять риск для пользователя. Повторная обработка, очистка, дезинфекция и

стерилизация могут ухудшить технические характеристики изделия, что в свою очередь создаст дополнительный риск нанесения телесных повреждений или развития инфекционных осложнений у пациента.

Применение тампона анального Reflex



Применение анального тампона показано людям, страдающим недержанием кала или непроизвольным выделением газов из кишечника. Анальный тампон является эффективным барьером, предотвращающим неконтролируемое выделение каловых масс из прямой кишки.

1. Подготовка

Нанести на кончик анального тампона Reflex небольшое количество смазывающего вещества на водной основе.

2. Введение

Осторожно введите анальный тампон Reflex в анальное отверстие так же, как вводят свечи. Убедитесь, что анальный тампон полностью введен в прямую кишку, глубже анального сфинктера. Шнур должен оставаться снаружи.



3. Применение

При правильном введении анального тампона в прямую кишку, он быстро расправляется и увеличивается до нормального размера после растворения пленки под воздействием естественного тепла и влаги. Тампон может находиться в прямой кишке в течение 12 часов.



4. Извлечение

Для извлечения анального тампона из прямой кишки необходимо осторожно потянуть за шнур, присоединенный к анальному тампону. Извлечение анального тампона не стимулирует рефлекс опорожнения прямой кишки. Новый анальный тампон может быть введен непосредственно после извлечения использованного тампона. После использования анальный тампон Reflex следует выбросить в мусорный бак. В унитаз НЕ СМЫВАТЬ.



Примечание: Тампон анальный Reflex следует извлечь не позднее, чем через 12 часов после введения. В случае возникновения трудностей, связанных с извлечением анального тампона следует обратиться к врачу.

Производитель:

ООО «УКО РЕАБИЛИТИ-РЕФЛЕКС»

108821, вн. тер. г. Поселение Филимонковское, ул. Усадебный парк, д. 1, помещ. 9Н, Москва, Россия

Тел.: +7 930 939 53 38

Uko-rn@yandex.ru

Претензии потребителя принимаются Производителем.

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 14 лист(ов)



Генеральный директор
ООО «УЗО. РЕАБИЛИТИ-РЕФЛЕКС»
Янута А. Н. Янута
« 30 » 10 2024 г.