

[별지 제41호 서식]

twintree tower (B) #101, 6 Yulgok-ro,

공증인가 법무법인 한미

Tel : 733-3955~6 Fax : 733-3950

Registered No. 2023-14896

NOTARIAL CERTIFICATE



HANMI LAW AND NOTARY OFFICE

twintree tower(B) #101, 6 Yulgok-ro,
Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea

DECLARATION

We (Applicant)

Toplan Co., Ltd.

CEO: Mr. Young Hwan Jang

do hereby solemnly and declare:

1. That the attached document(s):

Instruction For Use

2. ☒ is (are) true and correct.



☐ is (are) true translation for the text(s) originally written in the Korean language conscientiously believing the same to be true and correct.

2023 / 09 / 12

Signature

Toplan Co., Ltd.

CEO Mr. Young Hwan Jang

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jang'.

Toplan Co., Ltd.

Ga-dong, 15, Neunggil-ro 115beon-gil, Danwon-gu,

Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

President Young Hwan Jang



	Statement	Rev. No	0
		Page	1

I hereby certify that the content below is truthful and accurate information.

Instruction For Use

To. Roszdravnadzor

We, Toplan Co., Ltd. hereby declare that Instruction For Use (IFU) provided to the Roszdravnadzor is complete, consistent and authentic.



September 05, 2023

Toplan Co., Ltd.

Signature:

Position: CEO (President)

Name : Jang Young Hwan

Toplan Co., Ltd.

Ga-dong, 13, Neunggil-ro 115beon-gil, Danwon-gu,
Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
President Young Hwan Jang

 **Toplan Co., Ltd.**



Toplan Co., Ltd
Ga-dong 13, Neunggil-ro 115beon-gil, Danwon-gu, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea
Tel: +82 31 365-3255 Fax: +82 31 365-3256 www.toplann.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Комплект абатментов Torlan с принадлежностями»

1. Описание

Торlап представляет собой торговую марку материалов зубных имплантатов. Зубной абатмент - это соединительный элемент между зубным имплантатом и коронкой, абатменты представляет собой соединительные элементы, которые устанавливаются на верхнюю часть имплантата или встраиваются в нее для фиксации коронки. Абатмент Торlап изготовлен из титанового сплава, а инструменты системы имплантата Торlап совместимы только с винтовым имплантатом Торlап.

Если изделие используется в сочетании с другими изделиями изготовителя, тогда могут возникать различные проблемы. В число проблем входят ослабление и поломка из-за недостаточных соединения и затяжки. Пожалуйста, проверьте этикетку изделия на предмет наличия на ней информации о коде изделия, спецификациях, дате изготовления и дате истечения срока годности.

2. Наименование изделия

Комплект абатментов Торlап с принадлежностями

3. Стерильность

Изделия нестерильные, одноразовые.

Поскольку это изделие поставляется в нестерильном состоянии, его необходимо каждый раз перед использованием стерилизовать следующим образом.

Нестерилизованные изделия необходимо перед использованием стерилизовать в автоклаве при 132 ° С в течение 15 минут, а абатменты перед использованием следует стерилизовать паром и высушить в течение 15 минут.

4. Условия хранения/применения/эксплуатации

Не помещайте изделия в место появления любой возможной инфекции. Храните в сухом месте при комнатной температуре. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. Транспортировка товаров должна осуществляться в транспортной упаковке при перевозке закрытого типа с соблюдением мер и правил перевозки, действующих для выбранного вида транспорта.

	Условия эксплуатации	Условия транспортировки	Условия хранения	
Температура °C	От +18°C(0/+2) до +42°C(-2/0)	+1°C ~ +38°C (±2°C)	+1°C ~ +30°C (±2°C)	Хранить в сухом и прохладном месте (1~30°C).. Избегайте прямого солнечного излучения.
Атмосферное давление	От 520 гПа до 1060 гПа	От 500 гПа до 1050 гПа	От 500 гПа до 1050 гПа	
Уровень влажности	0% ~ 100%	10~90%	10~90%	

5. Назначение

Абатменты изготовлены из титанового сплава и предназначены для восстановления жевательной функции пациентов путем хирургической установки искусственных зубов в верхнечелюстную или нижнечелюстную кость.

6. Меры предосторожности

Хирургическая методика имплантации представляет собой сложную, требующую наличия специальных навыков, процедуру. К проведению операции по имплантации допускаются только соответствующие лица, получившие формальное образование.

Перед имплантацией необходимо сдать анализы: анализ крови, осмотр ротовой полости, рентгенологическое исследование, КТ.

Абатменты следует выбирать индивидуально, принимая во внимание анатомические и пространственные особенности, в соответствии с типом имплантата, пространством между имплантатами, положением и тканями.

7. Процедураные меры предосторожности

Использование изделия после стерилизации Стерилизованные продукты следует использовать немедленно.

Для всех абатментов Torlap необходимо использовать момент затяжки 30 Н-см. (Рекомендуемый момент затяжки $\approx$ 30 Н-см) Все хирургические инструменты должны находиться в надлежащем состоянии. Поскольку имплантаты, протезы и инструменты имеют небольшие размеры, следует проявлять осторожность, чтобы не допустить их попадания в дыхательные пути и удушия пациента. Системная информация и информация о совместимости (Мини, Обычный, Широкий) абатмента и имплантата должна быть подтверждена до использования во избежание ослабления соединения или перелома в результате неправильной фиксации. После фиксации абатмента на имплантате необходимо выполнить проверку на соответствие соединения требованиям методом рентгенографического исследования. Для предотвращения ослабления соединения винт рекомендуется подтянуть 2-3 раза. Чрезмерный момент затяжки может привести к разрыву винта. Угловой абатмент может сломаться ввиду ограниченной жесткости имплантата. Поэтому его не рекомендуется использовать в задней области ротовой полости. При изготовлении протеза важно добиться правильного распределения нагрузки. В случае мостовидного зубного протеза необходимо подтвердить совместимость протеза и абатмента и выполнить корректировку прикуса. Чрезмерный выступ протеза может привести к перелому системы имплантатов.

8. Показания к применению

Изделия показаны для использования при частичном отсутствии зубов или при полной адентии нижней и верхней челюсти, в качестве опоры для одиночных или многоэлементных реставрационных конструкций, включая протезы с цементной или винтовой фиксацией, съемные протезы, а также в качестве окончательной или временной опоры для абатмента под несъемным мостовидным протезом.

9. Предупреждение

При пероральном использовании продукты должны быть защищены от аспирации. Вдыхание продуктов может привести к инфицированию или незапланированным телесным повреждениям. Имплантат подлежит восстановлению только с использованием соответствующего оригинального абатмента, совместимого с конкретным имплантатом. Временные реставрации всегда следует ставить вне области окклюзии. Не шлифуйте, не полируйте и не подвергайте пескоструйной обработке какие-либо части абатмента. Не превышайте рекомендованный момент затяжки при установке, так как это может привести к поломке абатмента. Значения момента затяжки ниже рекомендуемых значений могут привести к расшатыванию абатмента. Угловые абатменты (Абатмент Angled) не следует использовать в зонах высоких механических нагрузок на имплантаты малого диаметра. Пескоструйная обработка, шлифовка или полировка соединения имплантата могут привести к выходу изделия из строя. Несоблюдение перечисленных в этих инструкциях процедур может нанести вред пациенту и/или привести к любому или всем из следующих осложнений, таких как проглатывание или аспирация компонентов, инфекция, повреждение абатмента, имплантата, компонентов или инструмента, ослабление абатмента или других компонентов, неправильная окончательная реставрация или неисправность мостовидного протеза, коронки или другого окончательного протеза, нарушение жевательной функции пациента, выход из строя имплантата, удаление имплантата.

10. Противопоказания

Комплект абатментов Torlap используются только в случае установки зубного имплантата, поэтому все противопоказания, запрещающие использование зубного имплантата, также запрещают использование абатментов.

- пациенты, страдающие гемофилией или имеющие проблемы, связанные со сложностью контроля травм твердых или мягких тканей;

- пациенты с неконтролируемым диабетом
- пациенты, которые являются заядлыми курильщиками или алкоголиками
- пациенты с ослабленной иммунной системой после химиотерапии или лучевой терапии
- пациенты с внутриротовой инфекцией или воспалением (ненадлежащая гигиена полости рта, бруксизм)
- пациенты с неустраняемой окклюзией/нарушением функции суставов, недостаточной длиной зубной дуги
- пациенты, не пригодные для хирургического вмешательства

11. Побочные действия

После проведения операции может возникнуть ряд проблем (потеря стабильности имплантата, повреждение протеза). Причинами подобных проблем могут быть: несоответствующее качество и объем остаточной костной ткани, аллергическая реакция, неполноценная гигиена ротовой полости или несоблюдение пациентом установленных требований, подвижность имплантата, частичное ухудшение состояния тканей или некорректное позиционирование имплантата.

12. Меры предосторожности для пациентов

Пожалуйста, тщательно соблюдайте гигиену ротовой полости. Не прилагайте слишком большого усилия до подсоединения последнего протеза.

13. Информация о потенциальных потребителях медицинского оборудования

Данное медицинское оборудование предназначено для использования в клинической практике квалифицированными врачами и медицинскими специалистами.

14. Совместимость с МРТ

Неферромагнитные абатменты безопасны для пациентов при проведении МРТ. Титан - парамагнитный материал, на который не действует магнитное поле МРТ. Риск связанных с имплантацией осложнений очень низок, и МРТ можно безопасно использовать у пациентов с имплантатами. Основываясь на литературе, наше изделие не имеет риска магнитного резонанса.

15. Срок службы/срок годности

Изделие поставляется нестерильным с неограниченным сроком годности и сроком эксплуатации.

16. Утилизация

После применения изделия, его необходимо утилизировать должным образом. При выборе способа утилизации, необходимо учитывать возможность отнесения изделия к эпидемиологически опасным отходам и необходимость применения соответствующих особых мер.

Класс опасности отходов– класс Б (эпидемиологически опасные отходы)

17. Гарантия

Гарантия на медицинское изделие составляет 1 год со дня покупки конечным потребителем.

Производитель гарантирует, что изделие соответствует заявленным свойствам и характеристикам, подтвержденным регистрационным удостоверением. При выявлении в изделиях дефектов, возникших по вине производителя, компания ООО «ОССТЕМ» принимает на себя обязательства по замене изделия на новое, при условии предоставления покупателем дефектного изделия и соответствующих документов в течение 1 года с момента покупки товара. Данная гарантия распространяется только на изделия, приобретенные у официального представителя производителя — ООО «ОССТЕМ» (Россия). Медицинские изделия с естественным износом обмену и возврату не подлежат. ООО «ОССТЕМ» не несёт ответственности в случае повреждения или отказа в работе изделия, а также нанесённого им ущерба в случае, если это явилось следствием нарушения пользователем правил применения изделия, самостоятельной модификации, а также использования изделия не по прямому назначению.

Производитель: Toplan Co., Ltd.

Га-дон, 13, Нынгил-ро, 115, Бон-гил,
Данвон-гу, Ансан-си, Кенги-до, 15420,
Республика Корея
Тел.: 82-31 365 3255
Факс: 82-31 365 3256
www.toplann.com

Адрес для обращения потребителей на территории РФ

Наименование: ООО «ОССТЕМ»
Юридический адрес: 115432, г. Москва, пр.
Андропова, д. 18, кор. 7, эт.8, оф. 1
Тел : +7-495-739-99-25
e-mail : info@osstem.ru

Символ	Расшифровка
	Нестерильно
	Не использовать повторно
	Осторожно
	Номер по каталогу
	Код серии
	Дата производства
	Обратитесь к инструкциям по применению
	Производитель
	Знак соответствия *

*может быть добавлен при необходимости

**Комплект абатментов Torlan с принадлежностями,
варианты исполнения:**

1. Абатмент T01 Two с винтом:

- T01TA4510TH, Hex / Ø4.5 / 1.0(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA4515TH, Hex / Ø4.5 / 1.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA4525TH, Hex / Ø4.5 / 2.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA4535TH, Hex / Ø4.5 / 3.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA4545TH, Hex / Ø4.5 / 4.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA4555TH, Hex / Ø4.5 / 5.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA5515TH, Hex / Ø5.5 / 1.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA5525TH, Hex / Ø5.5 / 2.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA5535TH, Hex / Ø5.5 / 3.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA5545TH, Hex / Ø5.5 / 4.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA5555TH, Hex / Ø5.5 / 5.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA6515TH, Hex / Ø6.5 / 1.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA6525TH, Hex / Ø6.5 / 2.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA6535TH, Hex / Ø6.5 / 3.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA6545TH, Hex / Ø6.5 / 4.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA6555TH, Hex / Ø6.5 / 5.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TAM4510TH, Mini / Hex / Ø4.0 / 1.0(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TAM4515TH, Mini / Hex / Ø4.0 / 1.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TAM4525TH, Mini / Hex / Ø4.0 / 2.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TAM4535TH, Mini / Hex / Ø4.0 / 3.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TAM4545TH, Mini / Hex / Ø4.0 / 4.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TAM4555TH, Mini / Hex / Ø4.0 / 5.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA4710TH, Hex / Ø4.5 / 1.0(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA4715TH, Hex / Ø4.5 / 1.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA4725TH, Hex / Ø4.5 / 2.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA4735TH, Hex / Ø4.5 / 3.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA4745TH, Hex / Ø4.5 / 4.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA4755TH, Hex / Ø4.5 / 5.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA5715TH, Hex / Ø5.5 / 1.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA5725TH, Hex / Ø5.5 / 2.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA5735TH, Hex / Ø5.5 / 3.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA5745TH, Hex / Ø5.5 / 4.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA5755TH, Hex / Ø5.5 / 5.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA6715TH, Hex / Ø6.5 / 1.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA6725TH, Hex / Ø6.5 / 2.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA6735TH, Hex / Ø6.5 / 3.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA6745TH, Hex / Ø6.5 / 4.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA6755TH, Hex / Ø6.5 / 5.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TAM4710TH, Mini / Hex / Ø4.0 / 1.0(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TAM4715TH, Mini / Hex / Ø4.0 / 1.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TAM4725TH, Mini / Hex / Ø4.0 / 2.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TAM4735TH, Mini / Hex / Ø4.0 / 3.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TAM4745TH, Mini / Hex / Ø4.0 / 4.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TAM4755TH, Mini / Hex / Ø4.0 / 5.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA4410TH, Hex / Ø4.5 / 1.0(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA4415TH, Hex / Ø4.5 / 1.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA4425TH, Hex / Ø4.5 / 2.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA4435TH, Hex / Ø4.5 / 3.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA4445TH, Hex / Ø4.5 / 4.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA4455TH, Hex / Ø4.5 / 5.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA5415TH, Hex / Ø5.5 / 1.5(G/H) / 4.0mm (H)

- T01TA5425TH, Hex / Ø5.5 / 2.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA5435TH, Hex / Ø5.5 / 3.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA5445TH, Hex / Ø5.5 / 4.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA5455TH, Hex / Ø5.5 / 5.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA6415TH, Hex / Ø6.5 / 1.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA6425TH, Hex / Ø6.5 / 2.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA6435TH, Hex / Ø6.5 / 3.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA6445TH, Hex / Ø6.5 / 4.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA6455TH, Hex / Ø6.5 / 5.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA4510NTH, Non-Hex / Ø4.5 / 1.0(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA4515NTH, Non-Hex / Ø4.5 / 1.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA4525NTH, Non-Hex / Ø4.5 / 2.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA4535NTH, Non-Hex / Ø4.5 / 3.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA4545NTH, Non-Hex / Ø4.5 / 4.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA4555NTH, Non-Hex / Ø4.5 / 5.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA5515NTH, Non-Hex / Ø5.5 / 1.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA5525NTH, Non-Hex / Ø5.5 / 2.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA5535NTH, Non-Hex / Ø5.5 / 3.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA5545NTH, Non-Hex / Ø5.5 / 4.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA5555NTH, Non-Hex / Ø5.5 / 5.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA6515NTH, Non-Hex / Ø6.5 / 1.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA6525NTH, Non-Hex / Ø6.5 / 2.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA6535NTH, Non-Hex / Ø6.5 / 3.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA6545NTH, Non-Hex / Ø6.5 / 4.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA6555NTH, Non-Hex / Ø6.5 / 5.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TAM4510NTH, Mini / Non-Hex / Ø4.0 / 1.0(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TAM4515NTH, Mini / Non-Hex / Ø4.0 / 1.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TAM4525NTH, Mini / Non-Hex / Ø4.0 / 2.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TAM4535NTH, Mini / Non-Hex / Ø4.0 / 3.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TAM4545NTH, Mini / Non-Hex / Ø4.0 / 4.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TAM4555NTH, Mini / Non-Hex / Ø4.0 / 5.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T01TA4710NTH, Non-Hex / Ø4.5 / 1.0(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA4715NTH, Non-Hex / Ø4.5 / 1.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA4725NTH, Non-Hex / Ø4.5 / 2.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA4735NTH, Non-Hex / Ø4.5 / 3.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA4745NTH, Non-Hex / Ø4.5 / 4.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA4755NTH, Non-Hex / Ø4.5 / 5.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA5715NTH, Non-Hex / Ø5.5 / 1.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA5725NTH, Non-Hex / Ø5.5 / 2.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA5735NTH, Non-Hex / Ø5.5 / 3.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA5745NTH, Non-Hex / Ø5.5 / 4.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA5755NTH, Non-Hex / Ø5.5 / 5.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA6715NTH, Non-Hex / Ø6.5 / 1.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA6725NTH, Non-Hex / Ø6.5 / 2.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA6735NTH, Non-Hex / Ø6.5 / 3.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA6745NTH, Non-Hex / Ø6.5 / 4.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA6755NTH, Non-Hex / Ø6.5 / 5.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TAM4710NTH, Mini / Non-Hex / Ø4.0 / 1.0(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TAM4715NTH, Mini / Non-Hex / Ø4.0 / 1.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TAM4725NTH, Mini / Non-Hex / Ø4.0 / 2.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TAM4735NTH, Mini / Non-Hex / Ø4.0 / 3.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TAM4745NTH, Mini / Non-Hex / Ø4.0 / 4.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TAM4755NTH, Mini / Non-Hex / Ø4.0 / 5.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T01TA4410NTH, Non-Hex / Ø4.5 / 1.0(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA4415NTH, Non-Hex / Ø4.5 / 1.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA4425NTH, Non-Hex / Ø4.5 / 2.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA4435NTH, Non-Hex / Ø4.5 / 3.5(G/H) / 4.0mm (H)

- T01TA4445NTH, Non-Hex / Ø4.5 / 4.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA4455NTH, Non-Hex / Ø4.5 / 5.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA5415NTH, Non-Hex / Ø5.5 / 1.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA5425NTH, Non-Hex / Ø5.5 / 2.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA5435NTH, Non-Hex / Ø5.5 / 3.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA5445NTH, Non-Hex / Ø5.5 / 4.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA5455NTH, Non-Hex / Ø5.5 / 5.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA6415NTH, Non-Hex / Ø6.5 / 1.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA6425NTH, Non-Hex / Ø6.5 / 2.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA6435NTH, Non-Hex / Ø6.5 / 3.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA6445NTH, Non-Hex / Ø6.5 / 4.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T01TA6455NTH, Non-Hex / Ø6.5 / 5.5(G/H) / 4.0mm (H)

2. Абатмент T02 Two с винтом:

- T02TA4510TH, Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 1.0(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA4515TH, Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 1.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA4525TH, Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 2.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA4535TH, Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 3.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA4545TH, Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 4.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA4555TH, Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 5.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA5515TH, Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 1.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA5525TH, Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 2.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA5535TH, Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 3.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA5545TH, Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 4.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA5555TH, Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 5.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA6515TH, Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 1.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA6525TH, Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 2.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA6535TH, Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 3.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA6545TH, Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 4.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA6555TH, Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 5.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TAM4510TH, Mini / Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 1.0(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TAM4515TH, Mini / Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 1.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TAM4525TH, Mini / Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 2.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TAM4535TH, Mini / Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 3.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TAM4545TH, Mini / Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 4.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TAM4555TH, Mini / Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 5.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA4710TH, Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 1.0(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA4715TH, Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 1.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA4725TH, Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 2.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA4735TH, Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 3.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA4745TH, Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 4.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA4755TH, Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 5.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA5715TH, Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 1.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA5725TH, Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 2.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA5735TH, Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 3.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA5745TH, Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 4.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA5755TH, Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 5.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA6715TH, Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 1.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA6725TH, Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 2.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA6735TH, Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 3.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA6745TH, Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 4.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA6755TH, Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 5.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TAM4710TH, Mini / Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 1.0(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TAM4715TH, Mini / Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 1.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TAM4725TH, Mini / Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 2.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TAM4735TH, Mini / Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 3.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TAM4745TH, Mini / Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 4.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TAM4755TH, Mini / Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 5.5(G/H) / 7.0mm (H)

- T02TA4410TH, Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 1.0(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA4415TH, Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 1.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA4425TH, Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 2.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA4435TH, Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 3.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA4445TH, Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 4.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA4455TH, Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 5.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA5415TH, Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 1.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA5425TH, Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 2.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA5435TH, Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 3.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA5445TH, Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 4.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA5455TH, Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 5.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA6415TH, Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 1.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA6425TH, Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 2.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA6435TH, Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 3.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA6445TH, Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 4.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA6455TH, Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 5.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA4510NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 1.0(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA4515NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 1.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA4525NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 2.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA4535NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 3.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA4545NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 4.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA4555NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 5.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA5515NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 1.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA5525NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 2.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA5535NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 3.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA5545NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 4.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA5555NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 5.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA6515NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 1.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA6525NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 2.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA6535NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 3.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA6545NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 4.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA6555NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 5.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TAM4510NTH, Mini / Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 1.0(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TAM4515NTH, Mini / Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 1.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TAM4525NTH, Mini / Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 2.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TAM4535NTH, Mini / Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 3.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TAM4545NTH, Mini / Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 4.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TAM4555NTH, Mini / Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 5.5(G/H) / 5.5mm (H)
- T02TA4710NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 1.0(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA4715NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 1.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA4725NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 2.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA4735NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 3.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA4745NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 4.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA4755NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 5.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA5715NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 1.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA5725NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 2.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA5735NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 3.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA5745NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 4.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA5755NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 5.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA6715NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 1.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA6725NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 2.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA6735NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 3.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA6745NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 4.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA6755NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 5.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TAM4710NTH, Mini / Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 1.0(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TAM4715NTH, Mini / Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 1.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TAM4725NTH, Mini / Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 2.5(G/H) / 7.0mm (H)

- T02TAM4735NTH, Mini / Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 3.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TAM4745NTH, Mini / Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 4.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TAM4755NTH, Mini / Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 5.5(G/H) / 7.0mm (H)
- T02TA4410NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 1.0(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA4415NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 1.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA4425NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 2.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA4435NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 3.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA4445NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 4.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA4455NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 5.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA5415NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 1.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA5425NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 2.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA5435NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 3.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA5445NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 4.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA5455NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 5.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA6415NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 1.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA6425NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 2.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA6435NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 3.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA6445NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 4.5(G/H) / 4.0mm (H)
- T02TA6455NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 5.5(G/H) / 4.0mm (H)

3. Абатмент T01 Milling с винтом:

- T01MA4010TH, Hex / Ø4.0 / 1.0mm(G/H)
- T01MA4515TH, Hex / Ø4.5 / 1.5mm(G/H)
- T01MA5515TH, Hex / Ø5.5 / 1.5mm(G/H)
- T01MA5525TH, Hex / Ø5.5 / 2.5mm(G/H)
- T01MA6515TH, Hex / Ø6.5 / 1.5mm(G/H)
- T01MA6525TH, Hex / Ø6.5 / 2.5mm(G/H)
- T01MA6535TH, Hex / Ø6.5 / 3.5mm(G/H)
- T01MA7525TH, Hex / Ø7.5 / 2.5mm(G/H)
- T01MA7535TH, Hex / Ø7.5 / 3.5mm(G/H)
- T01MAM4010TH, Mini / Hex / Ø4.0 / 1.0mm(G/H)
- T01MAM4020TH, Mini / Hex / Ø4.0 / 2.0mm(G/H)
- T01MAM4030TH, Mini / Hex / Ø4.0 / 3.0mm(G/H)
- T01MA4010NTH, Non-Hex / Ø4.0 / 1.0mm(G/H)
- T01MA4515NTH, Non-Hex / Ø4.5 / 1.5mm(G/H)
- T01MA5515NTH, Non-Hex / Ø5.5 / 1.5mm(G/H)
- T01MA5525NTH, Non-Hex / Ø5.5 / 2.5mm(G/H)
- T01MA6515NTH, Non-Hex / Ø6.5 / 1.5mm(G/H)
- T01MA6525NTH, Non-Hex / Ø6.5 / 2.5mm(G/H)
- T01MA6535NTH, Non-Hex / Ø6.5 / 3.5mm(G/H)
- T01MA7525NTH, Non-Hex / Ø7.5 / 2.5mm(G/H)
- T01MA7535NTH, Non-Hex / Ø7.5 / 3.5mm(G/H)
- T01MAM4010NTH, Mini / Non-Hex / Ø4.0 / 1.0mm(G/H)
- T01MAM4020NTH, Mini / Non-Hex / Ø4.0 / 2.0mm(G/H)
- T01MAM4030NTH, Mini / Non-Hex / Ø4.0 / 3.0mm(G/H)

4. Абатмент T02 Milling с винтом:

- T02MA4010TH, Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 1.0mm(G/H)
- T02MA4515TH, Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 1.5mm(G/H)
- T02MA5515TH, Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 1.5mm(G/H)
- T02MA5525TH, Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 2.5mm(G/H)
- T02MA6515TH, Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 1.5mm(G/H)
- T02MA6525TH, Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 2.5mm(G/H)
- T02MA6535TH, Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 3.5mm(G/H)
- T02MA7525TH, Hex / 1.2Hex / Ø7.5 / 2.5mm(G/H)
- T02MA7535TH, Hex / 1.2Hex / Ø7.5 / 3.5mm(G/H)
- T02MAM4010TH, Mini / Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 1.0mm(G/H)
- T02MAM4020TH, Mini / Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 2.0mm(G/H)
- T02MAM4030TH, Mini / Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 3.0mm(G/H)

- T02MA4010NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 1.0mm(G/H)
- T02MA4515NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 1.5mm(G/H)
- T02MA5515NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 1.5mm(G/H)
- T02MA5525NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø5.5 / 2.5mm(G/H)
- T02MA6515NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 1.5mm(G/H)
- T02MA6525NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 2.5mm(G/H)
- T02MA6535NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø6.5 / 3.5mm(G/H)
- T02MA7525NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø7.5 / 2.5mm(G/H)
- T02MA7535NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø7.5 / 3.5mm(G/H)
- T02MAM4010NTH, Mini / Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 1.0mm(G/H)
- T02MAM4020NTH, Mini / Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 2.0mm(G/H)
- T02MAM4030NTH, Mini / Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.0 / 3.0mm(G/H)

5. Абатмент T01 Angled с винтом:

- T01AA154515TH, Hex / 15(R) / Ø4.5 / 1.5mm(G/H)
- T01AA154525TH, Hex / 15(R) / Ø4.5 / 2.5mm(G/H)
- T01AA154535TH, Hex / 15(R) / Ø4.5 / 3.5mm(G/H)
- T01AA155515TH, Hex / 15(R) / Ø5.5 / 1.5mm(G/H)
- T01AA155525TH, Hex / 15(R) / Ø5.5 / 2.5mm(G/H)
- T01AA155535TH, Hex / 15(R) / Ø5.5 / 3.5mm(G/H)
- T01AA254515TH, Hex / 25(R) / Ø4.5 / 1.5mm(G/H)
- T01AA254525TH, Hex / 25(R) / Ø4.5 / 2.5mm(G/H)
- T01AA254535TH, Hex / 25(R) / Ø4.5 / 3.5mm(G/H)
- T01AA255515TH, Hex / 25(R) / Ø5.5 / 1.5mm(G/H)
- T01AA255525TH, Hex / 25(R) / Ø5.5 / 2.5mm(G/H)
- T01AA255535TH, Hex / 25(R) / Ø5.5 / 3.5mm(G/H)
- T01AAM154015TH, Mini / Hex / 15(R) / Ø4.0 / 1.5mm(G/H)
- T01AAM154025TH, Mini / Hex / 15(R) / Ø4.0 / 2.5mm(G/H)
- T01AAM154035TH, Mini / Hex / 15(R) / Ø4.0 / 3.5mm(G/H)
- T01AAM254015TH, Mini / Hex / 25(R) / Ø4.0 / 1.5mm(G/H)
- T01AAM254025TH, Mini / Hex / 25(R) / Ø4.0 / 2.5mm(G/H)
- T01AAM254035TH, Mini / Hex / 25(R) / Ø4.0 / 3.5mm(G/H)
- T01AA154515NTH, Non-Hex / 15(R) / Ø4.5 / 1.5mm(G/H)
- T01AA154525NTH, Non-Hex / 15(R) / Ø4.5 / 2.5mm(G/H)
- T01AA154535NTH, Non-Hex / 15(R) / Ø4.5 / 3.5mm(G/H)
- T01AA155515NTH, Non-Hex / 15(R) / Ø5.5 / 1.5mm(G/H)
- T01AA155525NTH, Non-Hex / 15(R) / Ø5.5 / 2.5mm(G/H)
- T01AA155535NTH, Non-Hex / 15(R) / Ø5.5 / 3.5mm(G/H)
- T01AA254515NTH, Non-Hex / 25(R) / Ø4.5 / 1.5mm(G/H)
- T01AA254525NTH, Non-Hex / 25(R) / Ø4.5 / 2.5mm(G/H)
- T01AA254535NTH, Non-Hex / 25(R) / Ø4.5 / 3.5mm(G/H)
- T01AA255515NTH, Non-Hex / 25(R) / Ø5.5 / 1.5mm(G/H)
- T01AA255525NTH, Non-Hex / 25(R) / Ø5.5 / 2.5mm(G/H)
- T01AA255535NTH, Non-Hex / 25(R) / Ø5.5 / 3.5mm(G/H)
- T01AAM154015NTH, Mini / Non-Hex / 15(R) / Ø4.0 / 1.5mm(G/H)
- T01AAM154025NTH, Mini / Non-Hex / 15(R) / Ø4.0 / 2.5mm(G/H)
- T01AAM154035NTH, Mini / Non-Hex / 15(R) / Ø4.0 / 3.5mm(G/H)
- T01AAM254015NTH, Mini / Non-Hex / 25(R) / Ø4.0 / 1.5mm(G/H)
- T01AAM254025NTH, Mini / Non-Hex / 25(R) / Ø4.0 / 2.5mm(G/H)
- T01AAM254035NTH, Mini / Non-Hex / 25(R) / Ø4.0 / 3.5mm(G/H)

6. Абатмент T02 Angled с винтом:

- T02AA154515TH, Hex / 1.2Hex / 15(R) / Ø4.5 / 1.5mm(G/H)
- T02AA154525TH, Hex / 1.2Hex / 15(R) / Ø4.5 / 2.5mm(G/H)
- T02AA154535TH, Hex / 1.2Hex / 15(R) / Ø4.5 / 3.5mm(G/H)
- T02AA155515TH, Hex / 1.2Hex / 15(R) / Ø5.5 / 1.5mm(G/H)
- T02AA155525TH, Hex / 1.2Hex / 15(R) / Ø5.5 / 2.5mm(G/H)
- T02AA155535TH, Hex / 1.2Hex / 15(R) / Ø5.5 / 3.5mm(G/H)
- T02AA254515TH, Hex / 1.2Hex / 25(R) / Ø4.5 / 1.5mm(G/H)

-T02AA254525TH, Hex / 1.2Hex / 25(R) / Ø4.5 / 2.5mm(G/H)
 -T02AA254535TH, Hex / 1.2Hex / 25(R) / Ø4.5 / 3.5mm(G/H)
 -T02AA255515TH, Hex / 1.2Hex / 25(R) / Ø5.5 / 1.5mm(G/H)
 -T02AA255525TH, Hex / 1.2Hex / 25(R) / Ø5.5 / 2.5mm(G/H)
 -T02AA255535TH, Hex / 1.2Hex / 25(R) / Ø5.5 / 3.5mm(G/H)
 -T02AAM154015TH, Mini / Hex / 1.2Hex / 15(R) / Ø4.0 / 1.5mm(G/H)
 -T02AAM154025TH, Mini / Hex / 1.2Hex / 15(R) / Ø4.0 / 2.5mm(G/H)
 -T02AAM154035TH, Mini / Hex / 1.2Hex / 15(R) / Ø4.0 / 3.5mm(G/H)
 -T02AAM254015TH, Mini / Hex / 1.2Hex / 25(R) / Ø4.0 / 1.5mm(G/H)
 -T02AAM254025TH, Mini / Hex / 1.2Hex / 25(R) / Ø4.0 / 2.5mm(G/H)
 -T02AAM254035TH, Mini / Hex / 1.2Hex / 25(R) / Ø4.0 / 3.5mm(G/H)
 -T02AA154515NTH, Non-Hex / 1.2Hex / 15(R) / Ø4.5 / 1.5mm(G/H)
 -T02AA154525NTH, Non-Hex / 1.2Hex / 15(R) / Ø4.5 / 2.5mm(G/H)
 -T02AA154535NTH, Non-Hex / 1.2Hex / 15(R) / Ø4.5 / 3.5mm(G/H)
 -T02AA155515NTH, Non-Hex / 1.2Hex / 15(R) / Ø5.5 / 1.5mm(G/H)
 -T02AA155525NTH, Non-Hex / 1.2Hex / 15(R) / Ø5.5 / 2.5mm(G/H)
 -T02AA155535NTH, Non-Hex / 1.2Hex / 15(R) / Ø5.5 / 3.5mm(G/H)
 -T02AA254515NTH, Non-Hex / 1.2Hex / 25(R) / Ø4.5 / 1.5mm(G/H)
 -T02AA254525NTH, Non-Hex / 1.2Hex / 25(R) / Ø4.5 / 2.5mm(G/H)
 -T02AA254535NTH, Non-Hex / 1.2Hex / 25(R) / Ø4.5 / 3.5mm(G/H)
 -T02AA255515NTH, Non-Hex / 1.2Hex / 25(R) / Ø5.5 / 1.5mm(G/H)
 -T02AA255525NTH, Non-Hex / 1.2Hex / 25(R) / Ø5.5 / 2.5mm(G/H)
 -T02AA255535NTH, Non-Hex / 1.2Hex / 25(R) / Ø5.5 / 3.5mm(G/H)
 -T02AAM154015NTH, Mini / Non-Hex / 1.2Hex / 15(R) / Ø4.0 / 1.5mm(G/H)
 -T02AAM154025NTH, Mini / Non-Hex / 1.2Hex / 15(R) / Ø4.0 / 2.5mm(G/H)
 -T02AAM154035NTH, Mini / Non-Hex / 1.2Hex / 15(R) / Ø4.0 / 3.5mm(G/H)
 -T02AAM254015NTH, Mini / Non-Hex / 1.2Hex / 25(R) / Ø4.0 / 1.5mm(G/H)
 -T02AAM254025NTH, Mini / Non-Hex / 1.2Hex / 25(R) / Ø4.0 / 2.5mm(G/H)

7. Абатмент T01 Port Angled с винтом:

-T01PAA104540TH, Hex / 10(R) / Ø4.6 / 4.0mm(G/H)
 -T01PAA104550TH, Hex / 10(R) / Ø4.6 / 5.0mm(G/H)
 -T01PAA174540TH, Hex / 17(R) / Ø4.6 / 4.0mm(G/H)
 -T01PAA174550TH, Hex / 17(R) / Ø4.6 / 5.0mm(G/H)
 -T01PAA304540TH, Hex / 30(R) / Ø4.6 / 4.0mm(G/H)
 -T01PAA304550TH, Hex / 30(R) / Ø4.6 / 5.0mm(G/H)
 -T01PAA104540NTH, Non-Hex / 10(R) / Ø4.6 / 4.0mm(G/H)
 -T01PAA104550NTH, Non-Hex / 10(R) / Ø4.6 / 5.0mm(G/H)
 -T01PAA174540NTH, Non-Hex / 17(R) / Ø4.6 / 4.0mm(G/H)
 -T01PAA174550NTH, Non-Hex / 17(R) / Ø4.6 / 5.0mm(G/H)
 -T01PAA304540NTH, Non-Hex / 30(R) / Ø4.6 / 4.0mm(G/H)
 -T01PAA304550NTH, Non-Hex / 30(R) / Ø4.6 / 5.0mm(G/H)

8. Абатмент T02 Port Angled с винтом:

-T02PAA104540TH, Hex / 1.2Hex / 10(R) / Ø4.6 / 4.0mm(G/H)
 -T02PAA104550TH, Hex / 1.2Hex / 10(R) / Ø4.6 / 5.0mm(G/H)
 -T02PAA174540TH, Hex / 1.2Hex / 17(R) / Ø4.6 / 4.0mm(G/H)
 -T02PAA174550TH, Hex / 1.2Hex / 17(R) / Ø4.6 / 5.0mm(G/H)
 -T02PAA304540TH, Hex / 1.2Hex / 30(R) / Ø4.6 / 4.0mm(G/H)
 -T02PAA304550TH, Hex / 1.2Hex / 30(R) / Ø4.6 / 5.0mm(G/H)
 -T02PAA104540NTH, Non-Hex / 1.2Hex / 10(R) / Ø4.6 / 4.0mm(G/H)
 -T02PAA104550NTH, Non-Hex / 1.2Hex / 10(R) / Ø4.6 / 5.0mm(G/H)
 -T02PAA174540NTH, Non-Hex / 1.2Hex / 17(R) / Ø4.6 / 4.0mm(G/H)
 -T02PAA174550NTH, Non-Hex / 1.2Hex / 17(R) / Ø4.6 / 5.0mm(G/H)
 -T02PAA304540NTH, Non-Hex / 1.2Hex / 30(R) / Ø4.6 / 4.0mm(G/H)
 -T02PAA304550NTH, Non-Hex / 1.2Hex / 30(R) / Ø4.6 / 5.0mm(G/H)

Принадлежности:


- 1 Колпачок T01 Abutment Level Comfort Cap. – не более 50 уп., (5 шт./уп.):
 -T01ALCC40S, Белый, Short Ø3.0, 4.0

- T01ALCC40M, Белый, Middle Ø3.0, 4.0
- T01ALCC40L, Белый, Long Ø3.0, 4.0
- T01ALCC45S, Белый, Short Ø4.5
- T01ALCC45M, Белый, Middle Ø4.5
- T01ALCC45L, Белый, Long Ø4.5
- T01ALCC55S, Белый, Short Ø5.5
- T01ALCC55M, Белый, Middle Ø5.5
- T01ALCC55L, Белый, Long Ø5.5
- T01ALCC65S, Белый, Short Ø6.5
- T01ALCC65M, Белый, Middle Ø6.5
- T01ALCC65L, Белый, Long Ø6.5

Технические характеристики

Спецификация

1) Абатмент T01 Two с винтом

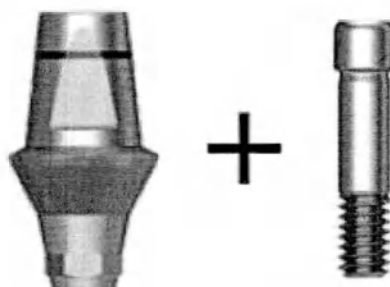

№	Название модели	Абатмент +винт
1	T01TA4510TH	T01TA4510 + T01ABS
2	T01TA4515TH	T01TA4515 + T01ABS
3	T01TA4525TH	T01TA4525 + T01ABS
4	T01TA4535TH	T01TA4535 + T01ABS
5	T01TA4545TH	T01TA4545 + T01ABS
6	T01TA4555TH	T01TA4555 + T01ABS
7	T01TA5515TH	T01TA5515 + T01ABS
8	T01TA5525TH	T01TA5525 + T01ABS
9	T01TA5535TH	T01TA5535 + T01ABS
10	T01TA5545TH	T01TA5545 + T01ABS
11	T01TA5555TH	T01TA5555 + T01ABS
12	T01TA6515TH	T01TA6515 + T01ABS
13	T01TA6525TH	T01TA6525 + T01ABS
14	T01TA6535TH	T01TA6535 + T01ABS
15	T01TA6545TH	T01TA6545 + T01ABS
16	T01TA6555TH	T01TA6555 + T01ABS
17	T01TA4510NTH	T01TA4510N + T01ABS
18	T01TA4515NTH	T01TA4515N + T01ABS
19	T01TA4525NTH	T01TA4525N + T01ABS

20	T01TA4535NTH	T01TA4535N + T01ABS
21	T01TA4545NTH	T01TA4545N + T01ABS
22	T01TA4555NTH	T01TA4555N + T01ABS
23	T01TA5515NTH	T01TA5515N + T01ABS
24	T01TA5525NTH	T01TA5525N + T01ABS
25	T01TA5535NTH	T01TA5535N + T01ABS
26	T01TA5545NTH	T01TA5545N + T01ABS
27	T01TA5555NTH	T01TA5555N + T01ABS
28	T01TA6515NTH	T01TA6515N + T01ABS
29	T01TA6525NTH	T01TA6525N + T01ABS
30	T01TA6535NTH	T01TA6535N + T01ABS
31	T01TA6545NTH	T01TA6545N + T01ABS
32	T01TA6555NTH	T01TA6555N + T01ABS
33	T01TA4710TH	T01TA4710 + T01ABS
34	T01TA4715TH	T01TA4715 + T01ABS
35	T01TA4725TH	T01TA4725 + T01ABS
36	T01TA4735TH	T01TA4735 + T01ABS
37	T01TA4745TH	T01TA4745 + T01ABS
38	T01TA4755TH	T01TA4755 + T01ABS
39	T01TA5715TH	T01TA5715 + T01ABS
40	T01TA5725TH	T01TA5725 + T01ABS
41	T01TA5735TH	T01TA5735 + T01ABS
42	T01TA5745TH	T01TA5745 + T01ABS
43	T01TA5755TH	T01TA5755 + T01ABS
44	T01TA6715TH	T01TA6715 + T01ABS
45	T01TA6725TH	T01TA6725 + T01ABS
46	T01TA6735TH	T01TA6735 + T01ABS
47	T01TA6745TH	T01TA6745 + T01ABS
48	T01TA6755TH	T01TA6755 + T01ABS
49	T01TA4710NTH	T01TA4710N + T01ABS
50	T01TA4715NTH	T01TA4715N + T01ABS

51	T01TA4725NTH	T01TA4725N + T01ABS
52	T01TA4735NTH	T01TA4735N + T01ABS
53	T01TA4745NTH	T01TA4745N + T01ABS
54	T01TA4755NTH	T01TA4755N + T01ABS
55	T01TA5715NTH	T01TA5715N + T01ABS
56	T01TA5725NTH	T01TA5725N + T01ABS
57	T01TA5735NTH	T01TA5735N + T01ABS
58	T01TA5745NTH	T01TA5745N + T01ABS
59	T01TA5755NTH	T01TA5755N + T01ABS
60	T01TA6715NTH	T01TA6715N + T01ABS
61	T01TA6725NTH	T01TA6725N + T01ABS
62	T01TA6735NTH	T01TA6735N + T01ABS
63	T01TA6745NTH	T01TA6745N + T01ABS
64	T01TA6755NTH	T01TA6755N + T01ABS
65	T01TA4410TH	T01TA4410 + T01ABS
66	T01TA4415TH	T01TA4415 + T01ABS
67	T01TA4425TH	T01TA4425 + T01ABS
68	T01TA4435TH	T01TA4435 + T01ABS
69	T01TA4445TH	T01TA4445 + T01ABS
70	T01TA4455TH	T01TA4455 + T01ABS
71	T01TA5415TH	T01TA5415 + T01ABS
72	T01TA5425TH	T01TA5425 + T01ABS
73	T01TA5435TH	T01TA5435 + T01ABS
74	T01TA5445TH	T01TA5445 + T01ABS
75	T01TA5455TH	T01TA5455 + T01ABS
76	T01TA6415TH	T01TA6415 + T01ABS
77	T01TA6425TH	T01TA6425 + T01ABS
78	T01TA6435TH	T01TA6435 + T01ABS
79	T01TA6445TH	T01TA6445 + T01ABS
80	T01TA6455TH	T01TA6455 + T01ABS
81	T01TA4410NTH	T01TA4410N + T01ABS

82	T01TA4415NTH	T01TA4415N + T01ABS
83	T01TA4425NTH	T01TA4425N + T01ABS
84	T01TA4435NTH	T01TA4435N + T01ABS
85	T01TA4445NTH	T01TA4445N + T01ABS
86	T01TA4455NTH	T01TA4455N + T01ABS
87	T01TA5415NTH	T01TA5415N + T01ABS
88	T01TA5425NTH	T01TA5425N + T01ABS
89	T01TA5435NTH	T01TA5435N + T01ABS
90	T01TA5445NTH	T01TA5445N + T01ABS
91	T01TA5455NTH	T01TA5455N + T01ABS
92	T01TA6415NTH	T01TA6415N + T01ABS
93	T01TA6425NTH	T01TA6425N + T01ABS
94	T01TA6435NTH	T01TA6435N + T01ABS
95	T01TA6445NTH	T01TA6445N + T01ABS
96	T01TA6455NTH	T01TA6455N + T01ABS
97	T01TAM4510TH	T01TAM4510 + T01ABSM
98	T01TAM4515TH	T01TAM4515 + T01ABSM
99	T01TAM4525TH	T01TAM4525 + T01ABSM
100	T01TAM4535TH	T01TAM4535 + T01ABSM
101	T01TAM4545TH	T01TAM4545 + T01ABSM
102	T01TAM4555TH	T01TAM4555 + T01ABSM
103	T01TAM4510NTH	T01TAM4510N + T01ABSM
104	T01TAM4515NTH	T01TAM4515N + T01ABSM
105	T01TAM4525NTH	T01TAM4525N + T01ABSM
106	T01TAM4535NTH	T01TAM4535N + T01ABSM
107	T01TAM4545NTH	T01TAM4545N + T01ABSM
108	T01TAM4555NTH	T01TAM4555N + T01ABSM
109	T01TAM4710TH	T01TAM4710 + T01ABSM
110	T01TAM4715TH	T01TAM4715 + T01ABSM
111	T01TAM4725TH	T01TAM4725 + T01ABSM
112	T01TAM4735TH	T01TAM4735 + T01ABSM


113	T01TAM4745TH	T01TAM4745 + T01ABSM
114	T01TAM4755TH	T01TAM4755 + T01ABSM
115	T01TAM4710NTH	T01TAM4710N + T01ABSM
116	T01TAM4715NTH	T01TAM4715N + T01ABSM
117	T01TAM4725NTH	T01TAM4725N + T01ABSM
118	T01TAM4735NTH	T01TAM4735N + T01ABSM
119	T01TAM4745NTH	T01TAM4745N + T01ABSM
120	T01TAM4755NTH	T01TAM4755N + T01ABSM

Абатмент T01 Two


(1) Отверстие для винта

(2) Лазерная маркировка

(3) Шестигранное соединение

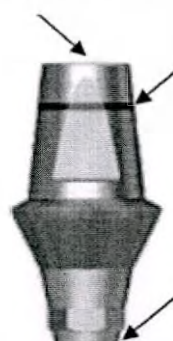

No	Части	Описание
1	Отверстие для винта	Винт абатмента соединяется с приспособлением через отверстие для винта.
2	Лазерная маркировка	Лазерная маркировка предоставляет информацию о длине при вырезании абатмента.
3	Шестигранное соединение	Шестигранная соединительная часть абатмента фиксируется вместе с фиксатором.

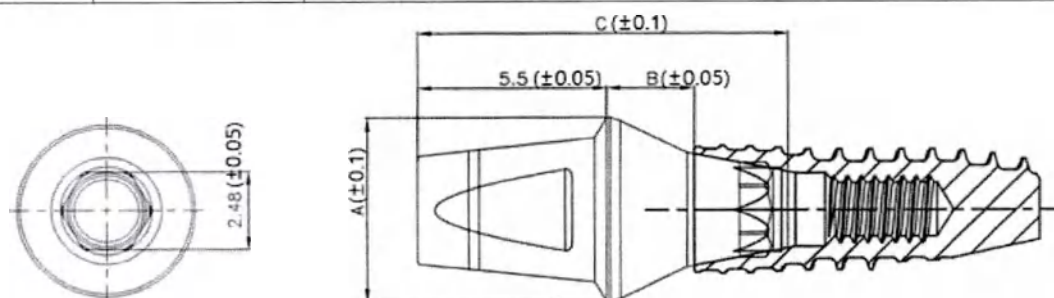


(Единицы: мм)

No.	Наименование модели	Спецификация			Масса, г ±2%	Примечание
		A ± 0.1	B ± 0.05	C ± 0.1		

1	T01TA4510	4.5	1.0	9.2	0,20	Нех (Шестигранник)
2	T01TA4515	4.5	1.5	9.7	0,22	Нех (Шестигранник)
3	T01TA4525	4.5	2.5	10.7	0,24	Нех (Шестигранник)
4	T01TA4535	4.5	3.5	11.7	0,25	Нех (Шестигранник)
5	T01TA4545	4.5	4.5	12.7	0,27	Нех (Шестигранник)
6	T01TA4555	4.5	5.5	13.7	0,28	Нех (Шестигранник)
7	T01TA5515	5.5	1.5	9.7	0,32	Нех (Шестигранник)
8	T01TA5525	5.5	2.5	10.7	0,34	Нех (Шестигранник)
9	T01TA5535	5.5	3.5	11.7	0,35	Нех (Шестигранник)
10	T01TA5545	5.5	4.5	12.7	0,37	Нех (Шестигранник)
11	T01TA5555	5.5	5.5	13.7	0,38	Нех (Шестигранник)
12	T01TA6515	6.5	1.5	9.7	0,42	Нех (Шестигранник)
13	T01TA6525	6.5	2.5	10.7	0,43	Нех (Шестигранник)
14	T01TA6535	6.5	3.5	11.7	0,45	Нех (Шестигранник)
15	T01TA6545	6.5	4.5	12.7	0,47	Нех (Шестигранник)
16	T01TA6555	6.5	5.5	13.7	0,49	Нех (Шестигранник)
17	T01TAM4510	4.0	1.0	8.6	0,18	Нех

						(Шестигранник), Mini (Мини)
18	T01TAM4515	4.0	1.5	9.1	0,20	Hex (Шестигранник), Mini (Мини)
19	T01TAM4525	4.0	2.5	10.1	0,23	Hex (Шестигранник), Mini (Мини)
20	T01TAM4535	4.0	3.5	11.1	0,26	Hex (Шестигранник), Mini (Мини)
21	T01TAM4545	4.0	4.5	12.1	0,28	Hex (Шестигранник), Mini (Мини)
22	T01TAM4555	4.0	5.5	13.1	0,30	Hex (Шестигранник), Mini (Мини)

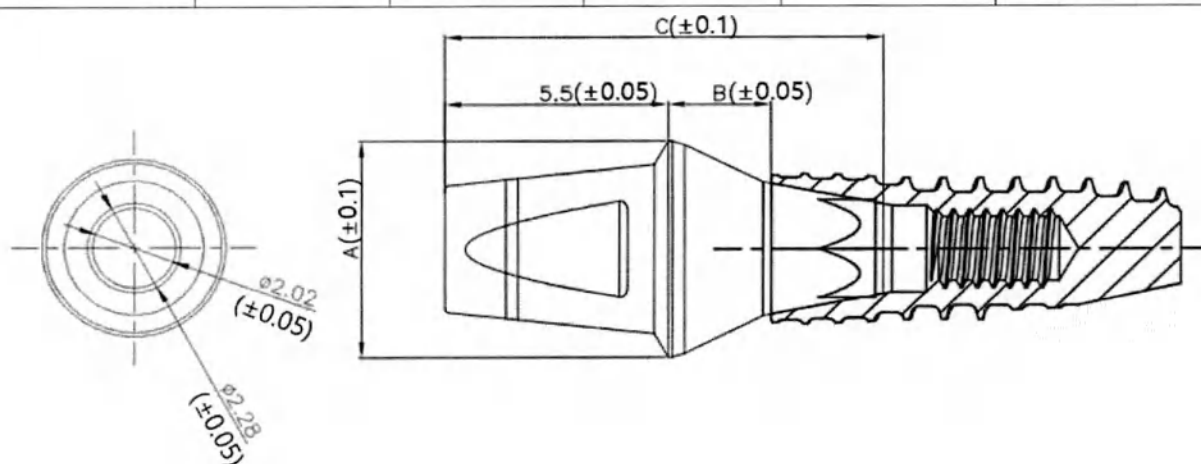


(Единицы: мм)

No.	No.	Наименование модели				Спецификация
		A± 0.1	B± 0.05	C± 0.1		
23	T01TA4510N	4.5	1.0	9.2	0,25	Non-Hex (Не шестигранник)
24	T01TA4515N	4.5	1.5	9.7	0,26	Non-Hex (Не шестигранник)

25	T01TA4525N	4.5	2.5	10.7	0,28	Non-Hex (Не шестигранник)
26	T01TA4535N	4.5	3.5	11.7	0,29	Non-Hex (Не шестигранник)
27	T01TA4545N	4.5	4.5	12.7	0,31	Non-Hex (Не шестигранник)
28	T01TA4555N	4.5	5.5	13.7	0,32	Non-Hex (Не шестигранник)
29	T01TA5515N	5.5	1.5	9.7	0,36	Non-Hex (Не шестигранник)
30	T01TA5525N	5.5	2.5	10.7	0,38	Non-Hex (Не шестигранник)
31	T01TA5535N	5.5	3.5	11.7	0,40	Non-Hex (Не шестигранник)
32	T01TA5545N	5.5	4.5	12.7	0,41	Non-Hex (Не шестигранник)
33	T01TA5555N	5.5	5.5	13.7	0,43	Non-Hex (Не шестигранник)
34	T01TA6515N	6.5	1.5	9.7	0,48	Non-Hex (Не шестигранник)
35	T01TA6525N	6.5	2.5	10.7	0,50	Non-Hex (Не шестигранник)
36	T01TA6535N	6.5	3.5	11.7	0,51	Non-Hex (Не шестигранник)
37	T01TA6545N	6.5	4.5	12.7	0,53	Non-Hex (Не шестигранник)
38	T01TA6555N	6.5	5.5	13.7	0,54	Non-Hex (Не шестигранник)
39	T01TAM4510N	4.0	1.0	8.6	0,17	Non-Hex (Не шестигранник), Мини (Mini)
40	T01TAM4515N	4.0	1.5	9.1	0,18	Non-Hex (Не шестигранник),

						Мини (Mini)
41	T01TAM4525N	4.0	2.5	10.1	0,20	Non-Hex (Не шестигранник), Мини (Mini)
42	T01TAM4535N	4.0	3.5	11.1	0,22	Non-Hex (Не шестигранник), Мини (Mini)
43	T01TAM4545N	4.0	4.5	12.1	0,24	Non-Hex (Не шестигранник), Мини (Mini)
44	T01TAM4555N	4.0	5.5	13.1	0,26	Non-Hex (Не шестигранник), Мини (Mini)

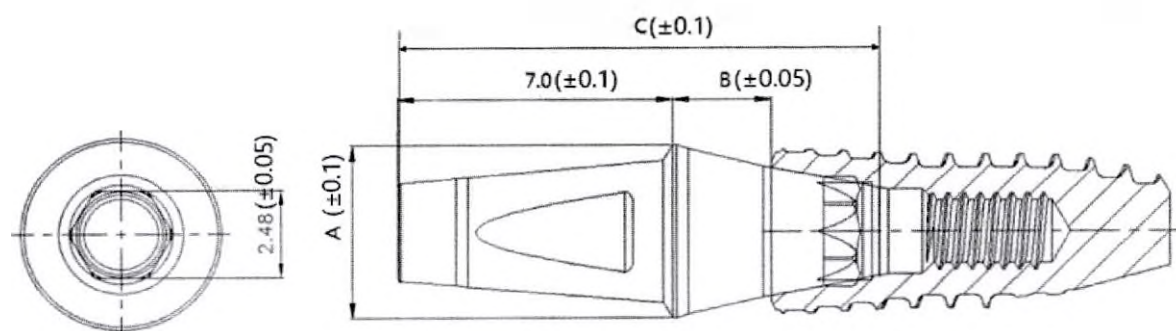


(Единица измерения: мм)

№	Название модели	Спец.			Масса, г ±2%	Примечание
		A ± 0.1	B ± 0.05	C ± 0.1		
45	T01TA4710	4,5	1,0	10,7	0,29	Hex (Шестигранник)
46	T01TA4715	4,5	1,5	11,2	0,30	Hex (Шестигранник)
47	T01TA4725	4,5	2,5	12,2	0,33	Hex (Шестигранник)
48	T01TA4735	4,5	3,5	13,2	0,36	Hex (Шестигранник)
49	T01TA4745	4,5	4,5	14,2	0,39	Hex

						(Шестигранник)
50	T01TA4755	4,5	5,5	15,2	0,42	Нех (Шестигранник)
51	T01TA5715	5,5	1,5	11,2	0,45	Нех (Шестигранник)
52	T01TA5725	5,5	2,5	12,2	0,48	Нех (Шестигранник)
53	T01TA5735	5,5	3,5	13,2	0,52	Нех (Шестигранник)
54	T01TA5745	5,5	4,5	14,2	0,56	Нех (Шестигранник)
55	T01TA5755	5,5	5,5	15,2	0,59	Нех (Шестигранник)
56	T01TA6715	6,5	1,5	11,2	0,70	Нех (Шестигранник)
57	T01TA6725	6,5	2,5	12,2	0,74	Нех (Шестигранник)
58	T01TA6735	6,5	3,5	13,2	0,78	Нех (Шестигранник)
59	T01TA6745	6,5	4,5	14,2	0,81	Нех (Шестигранник)
60	T01TA6755	6,5	5,5	15,2	0,86	Нех (Шестигранник)
61	T01TAM4710	4,0	1,0	10,1	0,24	Нех (Шестигранник), Mini (Мини)
62	T01TAM4715	4,0	1,5	10,6	0,25	Нех (Шестигранник), Mini (Мини)
63	T01TAM4725	4,0	2,5	11,6	0,26	Нех (Шестигранник), Mini (Мини)
64	T01TAM4735	4,0	3,5	12,6	0,27	Нех


						(Шестигранник), Mini (Мини)
65	T01TAM4745	4,0	4,5	13,6	0,26	Hex (Шестигранник), Mini (Мини)
66	T01TAM4755	4,0	5,5	14,6	0,29	Hex (Шестигранник), Mini (Мини)

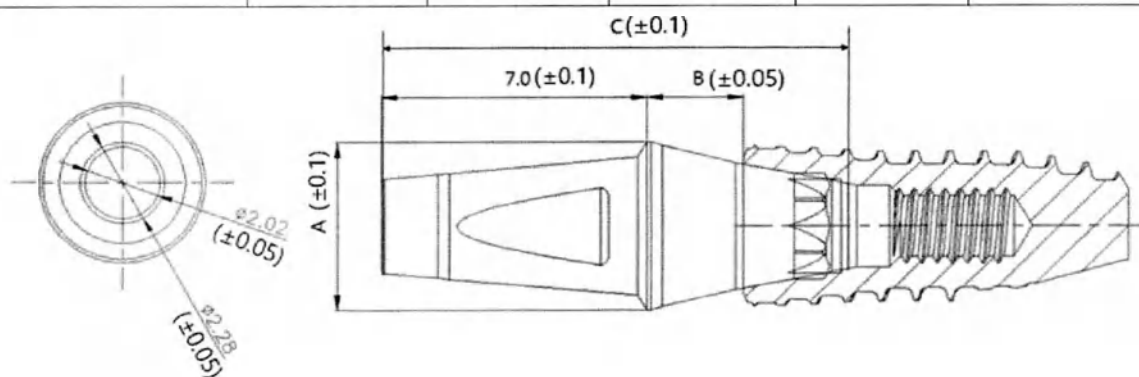

(Единица измерения: мм)

№	Название модели	Спец.			Масса, г ±2%	Примечание
		A± 0.1	B± 0.05	C± 0.1		
67	T01TA4710N	4,5	1,0	10,7	0,29	Non-Hex (Не шестигранник)
68	T01TA4715N	4,5	1,5	11,2	0,30	Non-Hex (Не шестигранник)
69	T01TA4725N	4,5	2,5	12,2	0,33	Non-Hex (Не шестигранник)
70	T01TA4735N	4,5	3,5	13,2	0,35	Non-Hex (Не шестигранник)
71	T01TA4745N	4,5	4,5	14,2	0,37	Non-Hex (Не шестигранник)
72	T01TA4755N	4,5	5,5	15,2	0,38	Non-Hex (Не шестигранник)
73	T01TA5715N	5,5	1,5	11,2	0,42	Non-Hex (Не шестигранник)
74	T01TA5725N	5,5	2,5	12,2	0,43	Non-Hex (Не шестигранник)
75	T01TA5735N	5,5	3,5	13,2	0,45	Non-Hex (Не шестигранник)
76	T01TA5745N	5,5	4,5	14,2	0,47	Non-Hex (Не шестигранник)
77	T01TA5755N	5,5	5,5	15,2	0,49	Non-Hex (Не шестигранник)


78	T01TA6715N	6,5	1,5	11,2	0,51	Non-Гех (Не шестигранник)
79	T01TA6725N	6,5	2,5	12,2	0,52	Non-Гех (Не шестигранник)
80	T01TA6735N	6,5	3,5	13,2	0,54	Non-Гех (Не шестигранник)
81	T01TA6745N	6,5	4,5	14,2	0,56	Non-Гех (Не шестигранник)
82	T01TA6755N	6,5	5,5	15,2	0,58	Non-Гех (Не шестигранник)
83	T01TAM4710N	4,0	1,0	10,1	0,14	Non-Гех (Не шестигранник, Mini (Мини))
84	T01TAM4715N	4,0	1,5	10,6	0,15	Non-Гех (Не шестигранник, Mini (Мини))
85	T01TAM4725N	4,0	2,5	11,6	0,16	Non-Гех (Не шестигранник, Mini (Мини))
86	T01TAM4735N	4,0	3,5	12,6	0,17	Non-Гех (Не шестигранник, Mini (Мини))
87	T01TAM4745N	4,0	4,5	13,6	0,18	Non-Гех (Не шестигранник, Mini (Мини))
88	T01TAM4755N	4,0	5,5	14,6	0,19	Non-Гех (Не шестигранник, Mini (Мини))

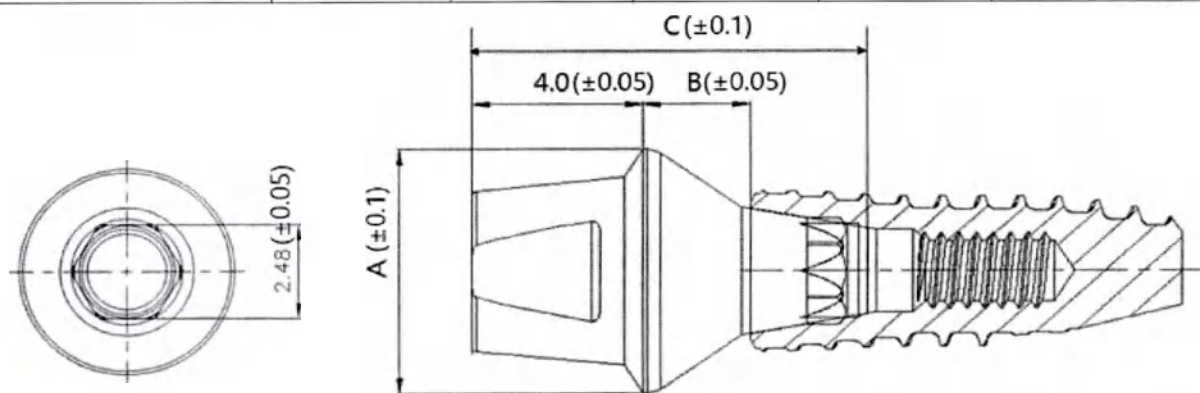

(Единица измерения: мм)

№	Название модели	Спец.			Масса, г ±2%	Примечание
		A ± 0.1	B ± 0.05	C ± 0.1		
89	T01TA4410	4,5	1,0	7,7	0,16	Гех (Шестигранник)
90	T01TA4415	4,5	1,5	8,2	0,17	Гех (Шестигранник)
91	T01TA4425	4,5	2,5	9,2	0,19	Гех (Шестигранник)

92	T01TA4435	4,5	3,5	10,2	0,21	Hex (Шестигранник)
93	T01TA4445	4,5	4,5	11,2	0,23	Hex (Шестигранник)
94	T01TA4455	4,5	5,5	12,2	0,25	Hex (Шестигранник)
95	T01TA5415	5,5	1,5	8,2	0,29	Hex (Шестигранник)
96	T01TA5425	5,5	2,5	9,2	0,30	Hex (Шестигранник)
97	T01TA5435	5,5	3,5	10,2	0,32	Hex (Шестигранник)
98	T01TA5445	5,5	4,5	11,2	0,34	Hex (Шестигранник)
99	T01TA5455	5,5	5,5	12,2	0,36	Hex (Шестигранник)
100	T01TA6415	6,5	1,5	8,2	0,40	Hex (Шестигранник)
101	T01TA6425	6,5	2,5	9,2	0,41	Hex (Шестигранник)
102	T01TA6435	6,5	3,5	10,2	0,43	Hex (Шестигранник)
103	T01TA6445	6,5	4,5	11,2	0,44	Hex (Шестигранник)
104	T01TA6455	6,5	5,5	12,2	0,46	Hex (Шестигранник)

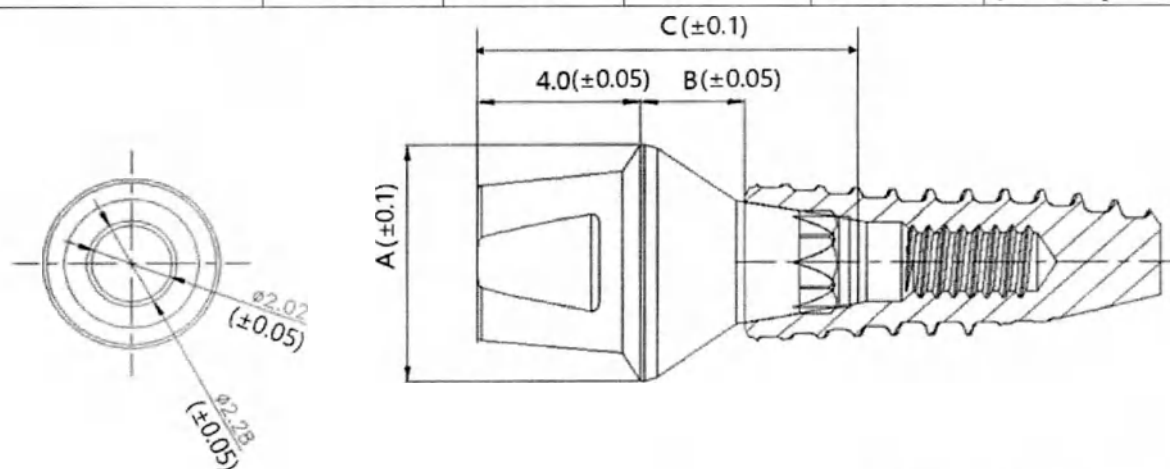


(Единица измерения: мм)

№	Название модели	Спец.			Масса, г ±2%	Примечание
		A ± 0.1	B ± 0.05	C ± 0.1		
105	T01TA4410N	4,5	1,0	7,7	0,16	Non-Hex (Не шестигранник)
106	T01TA4415N	4,5	1,5	8,2	0,17	Non-Hex (Не шестигранник)

107	T01TA4425N	4,5	2,5	9,2	0,20	Non-Hex (Не шестигранник)
108	T01TA4435N	4,5	3,5	10,2	0,23	Non-Hex (Не шестигранник)
109	T01TA4445N	4,5	4,5	11,2	0,26	Non-Hex (Не шестигранник)
110	T01TA4455N	4,5	5,5	12,2	0,28	Non-Hex (Не шестигранник)
111	T01TA5415N	5,5	1,5	8,2	0,36	Non-Hex (Не шестигранник)
112	T01TA5425N	5,5	2,5	9,2	0,40	Non-Hex (Не шестигранник)
113	T01TA5435N	5,5	3,5	10,2	0,44	Non-Hex (Не шестигранник)
114	T01TA5445N	5,5	4,5	11,2	0,47	Non-Hex (Не шестигранник)
115	T01TA5455N	5,5	5,5	12,2	0,52	Non-Hex (Не шестигранник)
116	T01TA6415N	6,5	1,5	8,2	0,60	Non-Hex (Не шестигранник)
117	T01TA6425N	6,5	2,5	9,2	0,65	Non-Hex (Не шестигранник)
118	T01TA6435N	6,5	3,5	10,2	0,68	Non-Hex (Не шестигранник)
119	T01TA6445N	6,5	4,5	11,2	0,70	Non-Hex (Не шестигранник)
120	T01TA6455N	6,5	5,5	12,2	0,74	Non-Hex (Не шестигранник)

2) Абатмент T02 Two с винтом

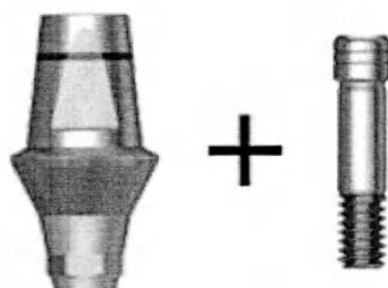

№	Название модели	Абатмент +винт
1	T02TA4510TH	T01TA4510 + T02ABS12
2	T02TA4515TH	T01TA4515 + T02ABS12
3	T02TA4525TH	T01TA4525 + T02ABS12
4	T02TA4535TH	T01TA4535 + T02ABS12
5	T02TA4545TH	T01TA4545 + T02ABS12
6	T02TA4555TH	T01TA4555 + T02ABS12
7	T02TA5515TH	T01TA5515 + T02ABS12
8	T02TA5525TH	T01TA5525 + T02ABS12
9	T02TA5535TH	T01TA5535 + T02ABS12
10	T02TA5545TH	T01TA5545 + T02ABS12
11	T02TA5555TH	T01TA5555 + T02ABS12
12	T02TA6515TH	T01TA6515 + T02ABS12
13	T02TA6525TH	T01TA6525 + T02ABS12
14	T02TA6535TH	T01TA6535 + T02ABS12
15	T02TA6545TH	T01TA6545 + T02ABS12
16	T02TA6555TH	T01TA6555 + T02ABS12
17	T02TA4510NTH	T01TA4510N + T02ABS12
18	T02TA4515NTH	T01TA4515N + T02ABS12
19	T02TA4525NTH	T01TA4525N + T02ABS12
20	T02TA4535NTH	T01TA4535N + T02ABS12
21	T02TA4545NTH	T01TA4545N + T02ABS12
22	T02TA4555NTH	T01TA4555N + T02ABS12
23	T02TA5515NTH	T01TA5515N + T02ABS12
24	T02TA5525NTH	T01TA5525N + T02ABS12


25	T02TA5535NTH	T01TA5535N + T02ABS12
26	T02TA5545NTH	T01TA5545N + T02ABS12
27	T02TA5555NTH	T01TA5555N + T02ABS12
28	T02TA6515NTH	T01TA6515N + T02ABS12
29	T02TA6525NTH	T01TA6525N + T02ABS12
30	T02TA6535NTH	T01TA6535N + T02ABS12
31	T02TA6545NTH	T01TA6545N + T02ABS12
32	T02TA6555NTH	T01TA6555N + T02ABS12
33	T02TA4710TH	T01TA4710 + T02ABS12
34	T02TA4715TH	T01TA4715 + T02ABS12
35	T02TA4725TH	T01TA4725 + T02ABS12
36	T02TA4735TH	T01TA4735 + T02ABS12
37	T02TA4745TH	T01TA4745 + T02ABS12
38	T02TA4755TH	T01TA4755 + T02ABS12
39	T02TA5715TH	T01TA5715 + T02ABS12
40	T02TA5725TH	T01TA5725 + T02ABS12
41	T02TA5735TH	T01TA5735 + T02ABS12
42	T02TA5745TH	T01TA5745 + T02ABS12
43	T02TA5755TH	T01TA5755 + T02ABS12
44	T02TA6715TH	T01TA6715 + T02ABS12
45	T02TA6725TH	T01TA6725 + T01ABS12
46	T02TA6735TH	T01TA6735 + T01ABS12
47	T02TA6745TH	T01TA6745 + T01ABS12
48	T02TA6755TH	T01TA6755 + T01ABS12
49	T02TA4710NTH	T01TA4710N + T02ABS12
50	T02TA4715NTH	T01TA4715N + T02ABS12
51	T02TA4725NTH	T01TA4725N + T02ABS12
52	T02TA4735NTH	T01TA4735N + T02ABS12
53	T02TA4745NTH	T01TA4745N + T02ABS12
54	T02TA4755NTH	T01TA4755N + T02ABS12
55	T02TA5715NTH	T01TA5715N + T02ABS12

56	T02TA5725NTH	T01TA5725N + T02ABS12
57	T02TA5735NTH	T01TA5735N + T02ABS12
58	T02TA5745NTH	T01TA5745N + T02ABS12
59	T02TA5755NTH	T01TA5755N + T02ABS12
60	T02TA6715NTH	T01TA6715 + T02ABS12
61	T02TA6725NTH	T01TA6725 + T01ABS12
62	T02TA6735NTH	T01TA6735 + T01ABS12
63	T02TA6745NTH	T01TA6745 + T01ABS12
64	T02TA6755NTH	T01TA6755 + T01ABS12
65	T02TA4410TH	T01TA4410 + T02ABS12
66	T02TA4415TH	T01TA4415 + T02ABS12
67	T02TA4425TH	T01TA4425 + T02ABS12
68	T02TA4435TH	T01TA4435 + T02ABS12
69	T02TA4445TH	T01TA4445 + T02ABS12
70	T02TA4455TH	T01TA4455 + T02ABS12
71	T02TA5415TH	T01TA5415 + T02ABS12
72	T02TA5425TH	T01TA5425 + T02ABS12
73	T02TA5435TH	T01TA5435 + T02ABS12
74	T02TA5445TH	T01TA5445 + T02ABS12
75	T02TA5455TH	T01TA5455 + T02ABS12
76	T02TA6415TH	T01TA6415 + T02ABS12
77	T02TA6425TH	T01TA6425 + T02ABS12
78	T02TA6435TH	T01TA6435 + T02ABS12
79	T02TA6445TH	T01TA6445 + T02ABS12
80	T02TA6455TH	T01TA6455 + T02ABS12
81	T02TA4410NTH	T01TA4410N + T02ABS12
82	T02TA4415NTH	T01TA4415N + T02ABS12
83	T02TA4425NTH	T01TA4425N + T02ABS12
84	T02TA4435NTH	T01TA4435N + T02ABS12
85	T02TA4445NTH	T01TA4445N + T02ABS12
86	T02TA4455NTH	T01TA4455N + T02ABS12

87	T02TA5415NTH	T01TA5415N + T02ABS12
88	T02TA5425NTH	T01TA5425N + T02ABS12
89	T02TA5435NTH	T01TA5435N + T02ABS12
90	T02TA5445NTH	T01TA5445N + T02ABS12
91	T02TA5455NTH	T01TA5455N + T02ABS12
92	T02TA6415NTH	T01TA6415N + T02ABS12
93	T02TA6425NTH	T01TA6425N + T02ABS12
94	T02TA6435NTH	T01TA6435N + T02ABS12
95	T02TA6445NTH	T01TA6445N + T02ABS12
96	T02TA6455NTH	T01TA6455N + T02ABS12
97	T02TAM4510TH	T01TAM4510 + T02ABSM12
98	T02TAM4515TH	T01TAM4515 + T02ABSM12
99	T02TAM4525TH	T01TAM4525 + T02ABSM12
100	T02TAM4535TH	T01TAM4535 + T02ABSM12
101	T02TAM4545TH	T01TAM4545 + T02ABSM12
102	T02TAM4555TH	T01TAM4555 + T02ABSM12
103	T02TAM4510NTH	T01TAM4510N + T02ABSM12
104	T02TAM4515NTH	T01TAM4515N + T02ABSM12
105	T02TAM4525NTH	T01TAM4525N + T02ABSM12
106	T02TAM4535NTH	T01TAM4535N + T02ABSM12
107	T02TAM4545NTH	T01TAM4545N + T02ABSM12
108	T02TAM4555NTH	T01TAM4555N + T02ABSM12
109	T02TAM4710TH	T01TAM4710 + T02ABSM12
110	T02TAM4715TH	T01TAM4715 + T02ABSM12
111	T02TAM4725TH	T01TAM4725 + T02ABSM12
112	T02TAM4735TH	T01TAM4735 + T02ABSM12
113	T02TAM4745TH	T01TAM4745 + T02ABSM12
114	T02TAM4755TH	T01TAM4755 + T02ABSM12
115	T02TAM4710NTH	T01TAM4710N + T02ABSM12
116	T02TAM4715NTH	T01TAM4715N + T02ABSM12
117	T02TAM4725NTH	T01TAM4725N + T02ABSM12

118	T02TAM4735NTH	T01TAM4735N + T02ABSM12
119	T02TAM4745NTH	T01TAM4745N + T02ABSM12
120	T02TAM4755NTH	T01TAM4755N + T02ABSM12

3) Абатмент T01 Milling с винтом

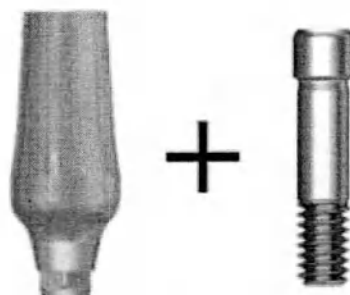

№	Название модели	Абатмент + винт
1	T01MA4010TH	T01MA4010 + T01ABS
2	T01MA4515TH	T01MA4515 + T01ABS
3	T01MA5515TH	T01MA5515 + T01ABS
4	T01MA5525TH	T01MA5525 + T01ABS
5	T01MA6515TH	T01MA6515 + T01ABS
6	T01MA6525TH	T01MA6525 + T01ABS
7	T01MA6535TH	T01MA6535 + T01ABS
8	T01MA7525TH	T01MA7525 + T01ABS
9	T01MA7535TH	T01MA7535 + T01ABS
10	T01MA4010NTH	T01MA4010N + T01ABS
11	T01MA4515NTH	T01MA4515N + T01ABS
12	T01MA5515NTH	T01MA5515N + T01ABS
13	T01MA5525NTH	T01MA5525N + T01ABS
14	T01MA6515NTH	T01MA6515N + T01ABS
15	T01MA6525NTH	T01MA6525N + T01ABS
16	T01MA6535NTH	T01MA6535N + T01ABS
17	T01MA7525NTH	T01MA7525N + T01ABS
18	T01MA7535NTH	T01MA7535N + T01ABS
19	T01MAM4010TH	T01MAM4010 + T01ABSM

20	T01MAM4020TH	T01MAM4020 + T01ABSM
21	T01MAM4030TH	T01MAM4030 + T01ABSM
22	T01MAM4010NTH	T01MAM4010N + T01ABSM
23	T01MAM4020NTH	T01MAM4020N + T01ABSM
24	T01MAM4030NTH	T01MAM4030N + T01ABSM


Абатмент T01 Milling

(1) Отверстие под винт



(2) Шестигранное соединение


№	Части	Описание
1	Отверстие под винт	Винт абатмента соединяется с имплантатом через отверстие под винт.
2	Шестигранное соединение	Соединительная часть абатмента шестигранной формы замыкается с соединением имплантата.

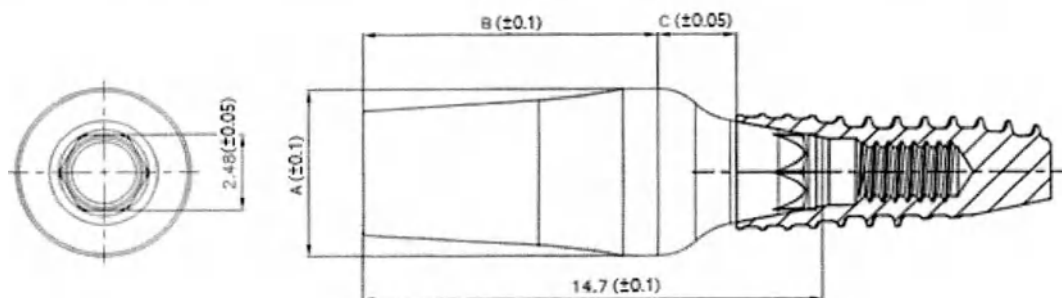

(Единица измерения: мм)

№	Название модели	Спец.			Масса, г ±2%	Примечание
		A ± 0.1	B ± 0.1	C ± 0.05		
1	T01MA4010	4,0	11,0	1,0	0,16	Hex (Шестигранник)
2	T01MA4515	4,5	10,5	1,5	0,20	Hex (Шестигранник)
3	T01MA5515	5,5	10,5	1,5	0,24	Hex (Шестигранник)
4	T01MA5525	5,5	9,5	2,5	0,29	Hex (Шестигранник)


5	T01MA6515	6,5	10,5	1,5	0,32	Hex (Шестигранник)
6	T01MA6525	6,5	9,5	2,5	0,36	Hex (Шестигранник)
7	T01MA6535	6,5	8,5	3,5	0,38	Hex (Шестигранник)
8	T01MA7525	7,5	9,5	2,5	1,40	Hex (Шестигранник)
9	T01MA7535	7,5	8,5	3,5	1,44	Hex (Шестигранник)
10	T01MAM4010	4,0	11,6	1,0	0,17	Hex (Шестигранник), Mini (Мини)
11	T01MAM4020	4,0	10,6	2,0	0,19	Hex (Шестигранник), Mini (Мини)
12	T01MAM4030	4,0	9,6	3,0	0,21	Hex (Шестигранник), Mini (Мини)

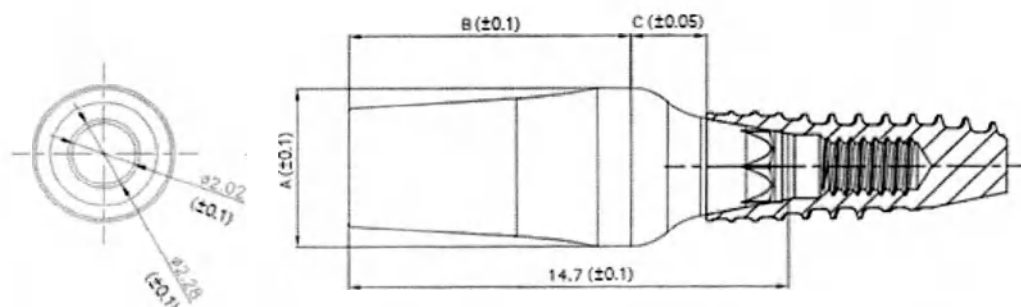

№	Название модели	Спец.			Масса, г ±2%	Примечание
		A ± 0.1	B ± 0.1	C ± 0.05		
13	T01MA4010N	4,0	11,0	1,0	0,18	Non-Hex (Не шестигранник)
14	T01MA4515N	4,5	10,5	1,5	0,22	Non-Hex (Не шестигранник)
15	T01MA5515N	5,5	10,5	1,5	0,34	Non-Hex (Не шестигранник)
16	T01MA5525N	5,5	9,5	2,5	0,42	Non-Hex (Не шестигранник)
17	T01MA6515N	6,5	10,5	1,5	0,62	Non-Hex (Не шестигранник)
18	T01MA6525N	6,5	9,5	2,5	0,71	Non-Hex (Не шестигранник)

19	T01MA6535N	6,5	8,5	3,5	0,84	Non-Hex (Не шестигранник)
20	T01MA7525N	7,5	9,5	2,5	1,35	Non-Hex (Не шестигранник)
21	T01MA7535N	7,5	8,5	3,5	1,43	Non-Hex (Не шестигранник)
22	T01MAM4010N	4,0	11,6	1,0	0,31	Non-Hex (Не шестигранник), Mini (Мини)
23	T01MAM4020N	4,0	10,6	2,0	0,32	Non-Hex (Не шестигранник), Mini (Мини)
24	T01MAM4030N	4,0	9,6	3,0	0,32	Non-Hex (Не шестигранник), Mini (Мини)


4) Абатмент T02 Milling с винтом

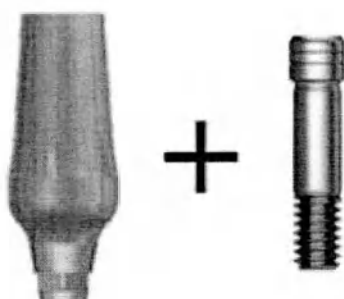

№	Название модели	Абатмент + винт
1	T02MA4010TH	T01MA4010 + T02ABS12
2	T02MA4515TH	T01MA4515 + T02ABS12
3	T02MA5515TH	T01MA5515 + T02ABS12
4	T02MA5525TH	T01MA5525 + T02ABS12
5	T02MA6515TH	T01MA6515 + T02ABS12
6	T02MA6525TH	T01MA6525 + T02ABS12
7	T02MA6535TH	T01MA6535 + T02ABS12

8	T02MA7525TH	T01MA7525 + T02ABS12
9	T02MA7535TH	T01MA7535 + T02ABS12
10	T02MA4010NTH	T01MA4010N + T02ABS12
11	T02MA4515NTH	T01MA4515N + T02ABS12
12	T02MA5515NTH	T01MA5515N + T02ABS12
13	T02MA5525NTH	T01MA5525N + T02ABS12
14	T02MA6515NTH	T01MA6515N + T02ABS12
15	T02MA6525NTH	T01MA6525N + T02ABS12
16	T02MA6535NTH	T01MA6535N + T02ABS12
17	T02MA7525NTH	T01MA7525N + T02ABS12
18	T02MA7535NTH	T01MA7535N + T02ABS12
19	T02MAM4010TH	T01MAM4010 + T02ABSM12
20	T02MAM4020TH	T01MAM4020 + T02ABSM12
21	T02MAM4030TH	T01MAM4030 + T02ABSM12
22	T02MAM4010NTH	T01MAM4010N + T02ABSM12
23	T02MAM4020NTH	T01MAM4020N + T02ABSM12
24	T02MAM4030NTH	T01MAM4030N + T02ABSM12

5) Абатмент T01 Angled с винтом

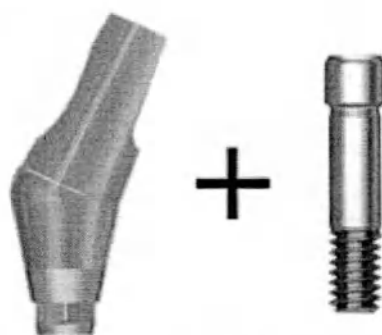


№	Название модели	Абатмент + винт
1	T01AA154515TH	T01AA154515 + T01ABS
2	T01AA154525TH	T01AA154525 + T01ABS
3	T01AA154535TH	T01AA154535 + T01ABS
4	T01AA155515TH	T01AA155515 + T01ABS
5	T01AA155525TH	T01AA155525 + T01ABS

6	T01AA155535TH	T01AA155535 + T01ABS
7	T01AA254515TH	T01AA254515 + T01ABS
8	T01AA254525TH	T01AA254525 + T01ABS
9	T01AA254535TH	T01AA254535 + T01ABS
10	T01AA255515TH	T01AA255515 + T01ABS
11	T01AA255525TH	T01AA255525 + T01ABS
12	T01AA255535TH	T01AA255535 + T01ABS
13	T01AA154515NTH	T01AA154515N + T01ABS
14	T01AA154525NTH	T01AA154525N + T01ABS
15	T01AA154535NTH	T01AA154535N + T01ABS
16	T01AA155515NTH	T01AA155515N + T01ABS
17	T01AA155525NTH	T01AA155525N + T01ABS
18	T01AA155535NTH	T01AA155535N + T01ABS
19	T01AA254515NTH	T01AA254515N + T01ABS
20	T01AA254525NTH	T01AA254525N + T01ABS
21	T01AA254535NTH	T01AA254535N + T01ABS
22	T01AA255515NTH	T01AA255515N + T01ABS
23	T01AA255525NTH	T01AA255525N + T01ABS
24	T01AA255535NTH	T01AA255535N + T01ABS
25	T01AAM154015TH	T01AAM154015 + T01ABSM
26	T01AAM154025TH	T01AAM154025 + T01ABSM
27	T01AAM154035TH	T01AAM154035 + T01ABSM
28	T01AAM254015TH	T01AAM254015 + T01ABSM
29	T01AAM254025TH	T01AAM254025 + T01ABSM
30	T01AAM254035TH	T01AAM254035 + T01ABSM
31	T01AAM154015NTH	T01AAM154015N + T01ABSM
32	T01AAM154025NTH	T01AAM154025N + T01ABSM
33	T01AAM154035NTH	T01AAM154035N + T01ABSM
34	T01AAM254015NTH	T01AAM254015N + T01ABSM
35	T01AAM254025NTH	T01AAM254025N + T01ABSM
36	T01AAM254035NTH	T01AAM254035N + T01ABSM


Абатмент T01 Angled

(1) Отверстие под винт

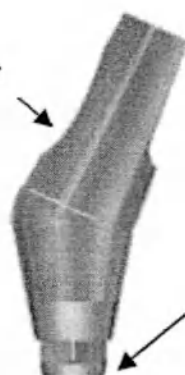

(2) Шестигранное


№	Части	Описание
1	Отверстие под винт	Винт абатмента соединяется с имплантатом через отверстие под винт.
2	Шестигранное соединение	Соединительная часть абатмента шестигранной формы замыкается с соединением имплантата.

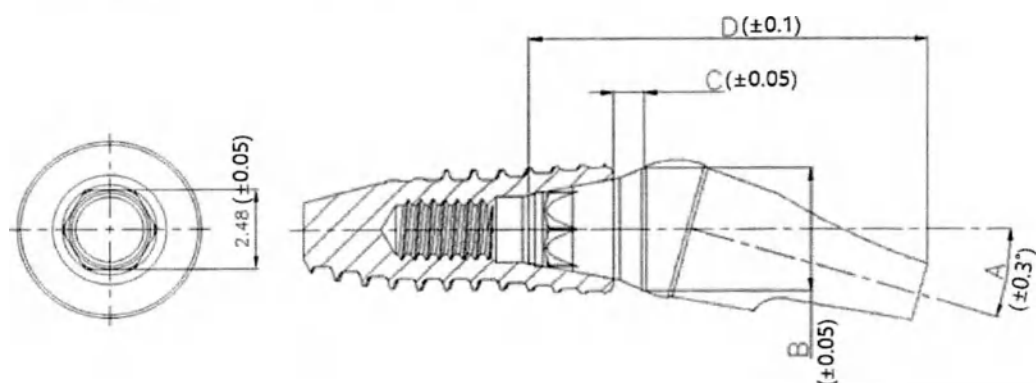

(Единица измерения: мм)

№	Название модели	Спец.				Масса, г (±2%)	Примечание
		A(±0.3°)	B(±0.05)	C(±0.05)	D(±0.1)		
1	T01AA154515	15	4,10	0,98	12,77	0,29	Нех (Шестигранник)
2	T01AA154525	15	4,44	2,41	13,76	0,29	Нех (Шестигранник)
3	T01AA154535	15	4,51	3,56	14,75	0,30	Нех (Шестигранник)
4	T01AA155515	15	5,08	1,06	13,01	0,31	Нех (Шестигранник)
5	T01AA155525	15	4,94	1,93	13,99	0,32	Нех (Шестигранник)

6	T01AA155535	15	5,22	3,27	14,99	0,33	Hex (Шестигранник)
7	T01AA254515	25	4,31	1,60	13,00	0,30	Hex (Шестигранник)
8	T01AA254525	25	4,44	2,88	14,01	0,31	Hex (Шестигранник)
9	T01AA254535	25	4,53	4,02	15,01	0,32	Hex (Шестигранник)
10	T01AA255515	25	4,64	1,06	13,42	0,32	Hex (Шестигранник)
11	T01AA255525	25	5,17	2,53	14,41	0,33	Hex (Шестигранник)
12	T01AA255535	25	5,31	3,80	15,43	0,34	Hex (Шестигранник)
13	T01AAM154015	15	3,93	2,28	12,19	0,29	Hex (Шестигранник), Mini (Мини)
14	T01AAM154025	15	3,94	3,29	13,19	0,30	Hex (Шестигранник), Mini (Мини)
15	T01AAM154035	15	3,94	4,29	14,10	0,31	Hex (Шестигранник), Mini (Мини)
16	T01AAM254015	25	3,81	2,39	12,53	0,32	Hex (Шестигранник), Mini (Мини)
17	T01AAM254025	25	3,91	3,60	13,55	0,33	Hex (Шестигранник), Mini (Мини)
18	T01AAM254035	25	3,93	4,70	14,54	0,34	Hex (Шестигранник), Mini (Мини)

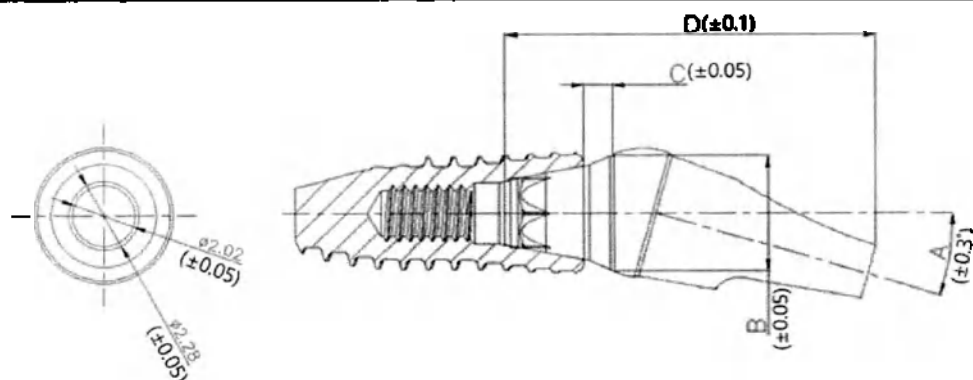


(Единица измерения: мм)

№	Название модели	Спецификация				Масса, г (±2%)	Примечание
		A(±0.3°)	B(±0.05)	C(±0.05)	D(±0.1)		
19	T01AA154515N	15	4,10	0,98	12,77	0,26	Non-Гех (Не шестигранник)
20	T01AA154525N	15	4,44	2,41	13,76	0,28	Non-Гех (Не шестигранник)
21	T01AA154535N	15	4,51	3,56	14,75	0,31	Non-Гех (Не шестигранник)
22	T01AA155515N	15	5,08	1,06	13,01	0,34	Non-Гех (Не шестигранник)
23	T01AA155525N	15	4,94	1,93	13,99	0,38	Non-Гех (Не шестигранник)
24	T01AA155535N	15	5,22	3,27	14,99	0,41	Non-Гех (Не шестигранник)
25	T01AA254515N	25	4,31	1,60	13,00	0,54	Non-Гех (Не шестигранник)
26	T01AA254525N	25	4,44	2,88	14,01	0,57	Non-Гех (Не шестигранник)
27	T01AA254535N	25	4,53	4,02	15,01	0,61	Non-Гех (Не шестигранник)
28	T01AA255515N	25	4,64	1,06	13,42	0,65	Non-Гех (Не шестигранник)
29	T01AA255525N	25	5,17	2,53	14,41	0,70	Non-Гех (Не шестигранник)
30	T01AA255535N	25	5,31	3,80	15,43	0,74	Non-Гех (Не шестигранник)
31	T01AAM154015N	15	3,93	2,28	12,19	0,37	Non-Гех (Не шестигранник), Mini (Мини)
32	T01AAM154025N	15	3,94	3,29	13,19	0,40	Non-Гех (Не шестигранник), Mini (Мини)
33	T01AAM154035N	15	3,94	4,29	14,10	0,42	Non-Гех (Не шестигранник)

							шестигранник), Mini (Мини)
34	T01AAM254015N	25	3,81	2,39	12,53	0,44	Non-Hex (Не шестигранник), Mini (Мини)
35	T01AAM254025N	25	3,91	3,60	13,55	0,46	Non-Hex (Не шестигранник), Mini (Мини)
36	T01AAM254035N	25	3,93	4,70	14,54	0,49	Non-Hex (Не шестигранник), Mini (Мини)


6) Абатмент T02 Angled с винтом

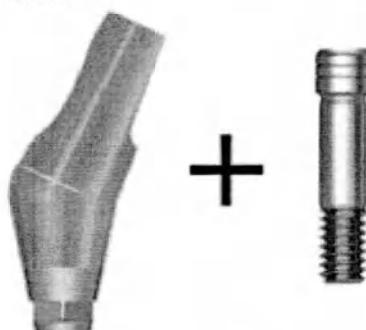

№	Название модели	Абатмент + винт
1	T02AA154515TH	T01AA154515 + T02ABS12
2	T02AA154525TH	T01AA154525 + T02ABS12
3	T02AA154535TH	T01AA154535 + T02ABS12
4	T02AA155515TH	T01AA155515 + T02ABS12
5	T02AA155525TH	T01AA155525 + T02ABS12
6	T02AA155535TH	T01AA155535 + T02ABS12
7	T02AA254515TH	T01AA254515 + T02ABS12
8	T02AA254525TH	T01AA254525 + T02ABS12
9	T02AA254535TH	T01AA254535 + T02ABS12
10	T02AA255515TH	T01AA255515 + T02ABS12
11	T02AA255525TH	T01AA255525 + T02ABS12
12	T02AA255535TH	T01AA255535 + T02ABS12
13	T02AA154515NTH	T01AA154515N + T02ABS12

14	T02AA154525NTH	T01AA154525N + T02ABS12
15	T02AA154535NTH	T01AA154535N + T02ABS12
16	T02AA155515NTH	T01AA155515N + T02ABS12
17	T02AA155525NTH	T01AA155525N + T02ABS12
18	T02AA155535NTH	T01AA155535N + T02ABS12
19	T02AA254515NTH	T01AA254515N + T02ABS12
20	T02AA254525NTH	T01AA254525N + T02ABS12
21	T02AA254535NTH	T01AA254535N + T02ABS12
22	T02AA255515NTH	T01AA255515N + T02ABS12
23	T02AA255525NTH	T01AA255525N + T02ABS12
24	T02AA255535NTH	T01AA255535N + T02ABS12
25	T02AAM154015TH	T01AAM154015 + T02ABSM12
26	T02AAM154025TH	T01AAM154025 + T02ABSM12
27	T02AAM154035TH	T01AAM154035 + T02ABSM12
28	T02AAM254015TH	T01AAM254015 + T02ABSM12
29	T02AAM254025TH	T01AAM254025 + T02ABSM12
30	T02AAM254035TH	T01AAM254035 + T02ABSM12
31	T02AAM154015NTH	T01AAM154015N + T02ABSM12
32	T02AAM154025NTH	T01AAM154025N + T02ABSM12
33	T02AAM154035NTH	T01AAM154035N + T02ABSM12
34	T02AAM254015NTH	T01AAM254015N + T02ABSM12
35	T02AAM254025NTH	T01AAM254025N + T02ABSM12
36	T02AAM254035NTH	T01AAM254035N + T02ABSM12


7) Абатмент T01 Port Angled с винтом

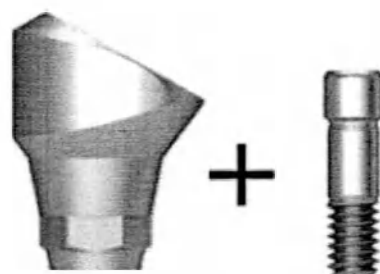

№	Название модели	Абатмент + винт
1	T01PAA104540TH	T01PAA104540 + T01PABS
2	T01PAA104550TH	T01PAA104550 + T01PABS
3	T01PAA174540TH	T01PAA174540 + T01PABS
4	T01PAA174550TH	T01PAA174550 + T01PABS
5	T01PAA304540TH	T01PAA304540 + T01PABS
6	T01PAA304550TH	T01PAA304550 + T01PABS
7	T01PAA104540NTH	T01PAA104540N + T01PABS
8	T01PAA104550NTH	T01PAA104550N + T01PABS
9	T01PAA174540NTH	T01PAA174540N + T01PABS
10	T01PAA174550NTH	T01PAA174550N + T01PABS
11	T01PAA304540NTH	T01PAA304540N + T01PABS
12	T01PAA304550NTH	T01PAA304550N + T01PABS


Абатмент T01 Port Angled

(1) Соединение головки абатмента

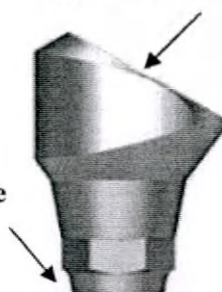


(2) Шестигранное соединение

№	Части	Описание
1	Соединение головки абатмента	Компонент съемного зубного протеза и головка абатмента затягиваются.
2	Шестигранное соединение	Соединительная часть абатмента шестигранной формы замыкается с соединением имплантатом.

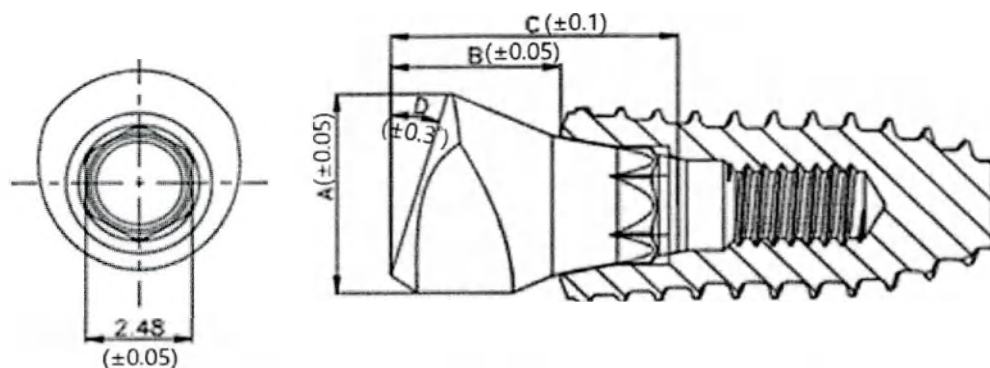

(Единица измерения : мм)

№	Название модели	Спец.				Масса, г (±2%)	Примечание
		A(±0.1)	B(±0.05)	C(±0.1)	D(±0.3°)		
1	T01PAA104540	4,71	4,00	6,70	10	0,24	Нех (Шестигранник)
2	T01PAA104550	4,71	5,00	7,70	10	0,25	Нех (Шестигранник)
3	T01PAA174540	4,82	4,00	6,70	17	0,28	Нех (Шестигранник)
4	T01PAA174550	4,82	5,00	7,70	17	0,29	Нех (Шестигранник)
5	T01PAA304540	4,84	4,00	6,70	30	0,30	Нех (Шестигранник)
6	T01PAA304550	4,84	5,00	7,70	30	0,32	Нех (Шестигранник)

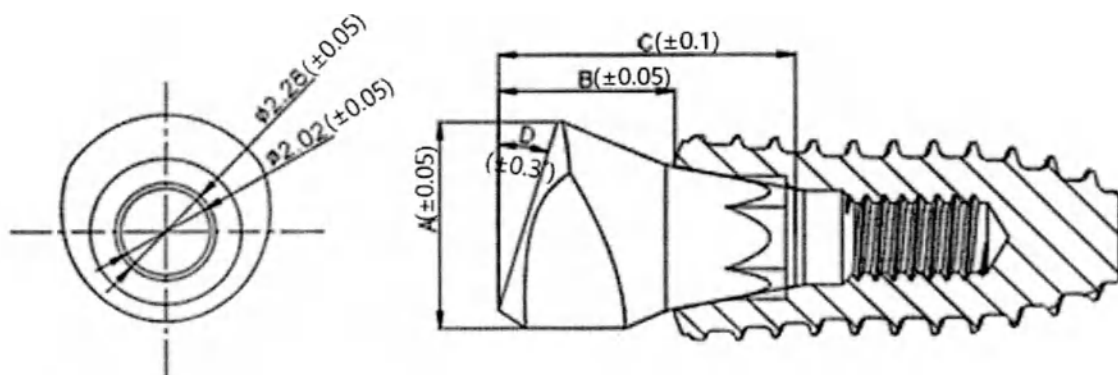


(Единица измерения : мм)

№	Название модели	Спец.				Масса, г (±2%)	Примечание
		A(±0.1)	B(±0.05)	C(±0.1)	D(±0.3°)		

1	T01PAA104540N	4,71	4,00	6,70	10	0,22	Non-Hex (Не шестигранник)
2	T01PAA104550N	4,71	5,00	7,70	10	0,24	Non-Hex (Не шестигранник)
3	T01PAA174540N	4,82	4,00	6,70	17	0,26	Non-Hex (Не шестигранник)
4	T01PAA174550N	4,82	5,00	7,70	17	0,28	Non-Hex (Не шестигранник)
5	T01PAA304540N	4,84	4,00	6,70	30	0,30	Non-Hex (Не шестигранник)
6	T01PAA304550N	4,84	5,00	7,70	30	0,33	Non-Hex (Не шестигранник)

8) Абатмент T02 Port Angled с винтом

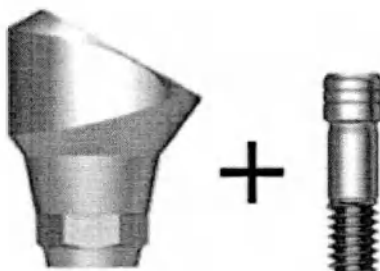


№	Название модели	Абатмент + винт
1	T02PAA104540TH	T01PAA104540 + T02PABS12
2	T02PAA104550TH	T01PAA104550 + T02PABS12
3	T02PAA174540TH	T01PAA174540 + T02PABS12
4	T02PAA174550TH	T01PAA174550 + T02PABS12
5	T02PAA304540TH	T01PAA304540 + T02PABS12
6	T02PAA304550TH	T01PAA304550 + T02PABS12
7	T02PAA104540NTH	T01PAA104540N + T02PABS12
8	T02PAA104550NTH	T01PAA104550N + T02PABS12
9	T02PAA174540NTH	T01PAA174540N + T02PABS12
10	T02PAA174550NTH	T01PAA174550N + T02PABS12

11	T02PAA304540NTH	T01PAA304540N + T02PABS12
12	T01PAA304550NTH	T01PAA304550N + T02PABS12



Характеристики винтов, входящих в комплект.

1) Винт T01

(1) Шестигранное отверстие

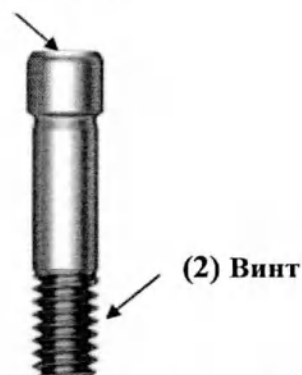

№	Части	Описание
1	Шестигранное отверстие	1.28 Отверстие шестигранной формы предназначено для шестигранной отвертки 1.28 в целях приложения усилия с тем, чтобы соединить винт с имплантатом.
2	Винт	Винт соединяет абатмент с имплантатом.

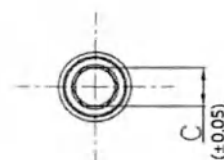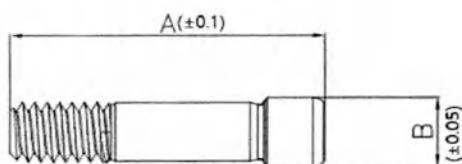

(Единица измерения: мм)


№	Название модели	Спецификация			Масса, г (±2%)	Примечание
		A(± 0.1)	B(± 0.05)	C(± 0.05)		
1	T01ABS	10,20	2,27	1,28	0,11-0,13	-
2	T01ABSM	10,20	2,10	1,28	0,07-0,08	Mini (Мини)

Винт T01 (T01ABS)



Диаметр. : $\varnothing 1.4$ мм (± 0.05 мм)

Шаг : 0,4 мм (± 0.05 мм)

Высота: 1.9 (± 0.05 мм)

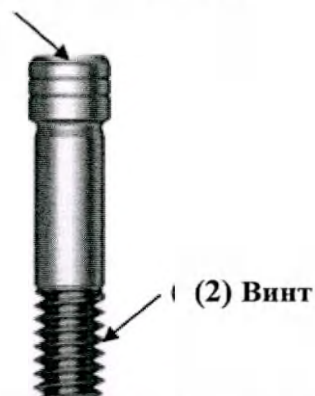Винт T01 (T01ABSM) - MiniДиаметр. : $\varnothing 1.2$ мм (± 0.05 мм)Шаг : 0.35 мм (± 0.05 мм)Высота : 1.56 (± 0.05 мм)**2) Винт T02****(1) Шестигранное отверстие**

№	Части	Описание
1	Шестигранное отверстие	1.20 Отверстие шестигранной формы предназначено для шестигранной отвертки 1.20 в целях приложения усилия с тем, чтобы соединить винт с имплантатом.
2	Винт	Винт соединяет абатмент с имплантатом.

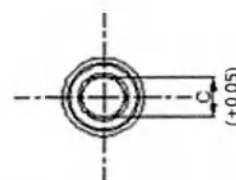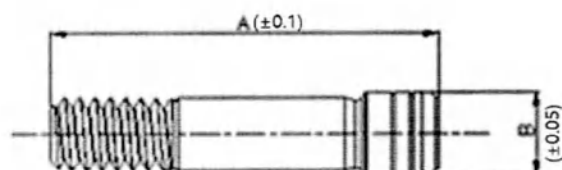

(Единица измерения: мм)

No.	Наименование модели	Спецификация			Масса, г ($\pm 2\%$)	Примечание
		A(± 0.1)	B(± 0.05)	C(± 0.05)		
1	T02ABS12	10,20	2,27	1,20	0,11-0,12	-
2	T02ABSM12	10,20	2,10	1,20	0,08-0,10	Mini (Мини)

Резьба винта:**Винт T02 (T02ABS12)**Диаметр. : $\varnothing 1.4$ мм (± 0.05 мм)Шаг : 0,4 мм (± 0.05 мм)

Высота : 1.9 (± 0.05 мм)

Винт T02 (T02ABSM12) - Mini

Диаметр. : $\varnothing 1.2$ мм (± 0.05 мм)

Шаг : 0.35 мм (± 0.05 мм)

Высота : 1.56 (± 0.05 мм)



3) Винт T01 Port Angled

(1) Шестигранное отверстие



(2) Винт

№	Части	Описание
1	Шестигранное отверстие	1.28 Отверстие шестигранной формы предназначено для шестигранной отвертки 1.28 в целях приложения усилия с тем, чтобы соединить винт с имплантатом.
2	Винт	Винт соединяет абатмент с имплантатом.

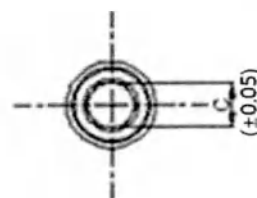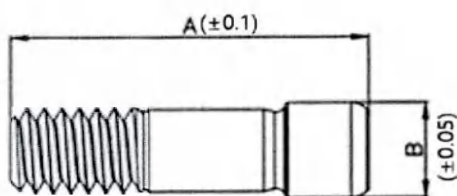

(Единица измерения: мм)

№	Название модели	Спецификация			Масса, г ($\pm 2\%$)	Примечание
		A(± 0.1)	B(± 0.05)	C(± 0.05)		
1	T01PABS	8,30	2,27	1,28	0,09-0,10	-

Резьба винта:

Винт T01 Port Angled

Диаметр. : $\varnothing 1.4$ мм (± 0.05 мм)

Шаг: 0,4 мм (± 0.05 мм)

Высота : 1.9 (± 0.05 мм)



4) Винт T02 Port Angled

(1) Шестигранное отверстие



(2) (2) Винт

№	Части	Описание
1	Шестигранное отверстие	1.20 Отверстие шестигранной формы предназначено для шестигранной отвертки 1.20 в целях приложения усилия с тем, чтобы соединить винт с имплантатом.
2	Винт	Винт соединяет абатмент с имплантатом.

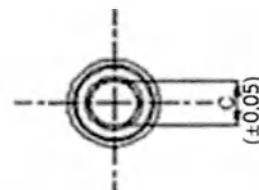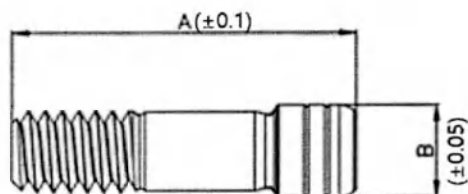

(Единица измерения: мм)

№	Название модели	Спецификация			Масса, г (±2%)	Примечание
		A(± 0.1)	B(± 0.05)	C(± 0.05)		
1	T02PABS12	8,30	2,27	1,20	0,07-0,08	-

Резьба винта:

Винт T02 Port Angled

Диаметр. : $\varnothing 1.4$ мм (± 0.05 мм)


Шаг : 0,4 мм (± 0.05 мм)

Высота : 1.9 (± 0.05 мм)

Принадлежности:


1) Колпачок T01 Abutment Level Comfort Cap

Используется как верхняя часть зубного абатмента, он присоединяется к верхней части абатмента, чтобы уменьшить ощущение постороннего предмета и предотвратить попадание посторонних веществ в отверстие для винта.

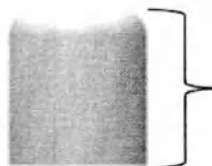

Колпачок T01 Abutment Level Comfort Cap

No	Наименование	Описание
1	Колпачок T01 Abutment Level Comfort Cap	Колпачок T01 Abutment Level Comfort Cap используется для защиты абатмента One от посторонних веществ во время изготовления протеза.

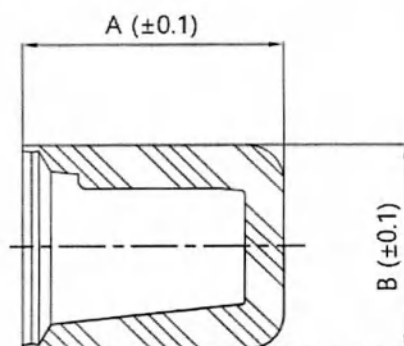

(Единица: мм)

No.	Наименование модели	Спецификация		Масса, г (±2%)	Примечание
		A (± 0.1)	B(∅)(± 0.1)		
1	T01ALCC40S	5.70	4.30	1,02-1,08	Short (короткий)
2	T01ALCC40M	7.20	4.30	1,03-1,10	Middle (средний)
3	T01ALCC40L	8.70	4.30	1,03-1,10	Long (длинный)
4	T01ALCC45S	5.70	4.80	1,03-1,10	Short (короткий)
5	T01ALCC45M	7.20	4.80	1,05-1,12	Middle (средний)
6	T01ALCC45L	8.70	4.80	1,06-0,13	Long (длинный)
7	T01ALCC55S	5.70	5.81	1,02-1,08	Short (короткий)
8	T01ALCC55M	7.20	5.81	1,04-1,11	Middle (средний)
9	T01ALCC55L	8.70	5.81	1,06-0,13	Long (длинный)
10	T01ALCC65S	5.70	6.85	1,02-1,08	Short (короткий)
11	T01ALCC65M	7.20	6.85	1,00-1-06	Middle (средний)
12	T01ALCC65L	8.70	6.85	1,00-1,05	Long (длинный)

1. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

1. Исходные материалы

Изделие \ Параметр	Материал	Компоненты (%)	Стандарт	Поставщик
Абатмент T01 Two Абатмент T01 Milling Абатмент T01 Angled Абатмент T01 Port Angled Винт T01 Винт T02 Винт T01 Port Angled Винт T02 Port Angled	Ti-6Al-4V Сплав титана	C: Макс. 0,08 Fe: 0,25 Макс. O: Макс. 0,13 N: Макс. 0,05 H: Макс. 0,012 Al : 5,5-6,5 V: 3,5-4,5 Ti: Баланс	ASTM F136	Fort Wayne Metal

Наименование	Материал	Марка	Производитель
Колпачок T01 Abutment Level Comfort Cap	Поликарбонат	PC 90627	SEWOO GLOBAL CO.,LTD.

2. Механические свойства

Части \ Параметр	Предел прочности на растяжение, мин., фунт/кв. дюйм (МПа)	Предел текучести (0.2% смещение) мин фунт на кв. дюйм (МПа)	Удлинение при 4D переломе имплантата, (%) мин.	Относительное сужение (%) мин.	Твердость (статическая) (HRC)	Шероховатость, мкм
Ti-6Al-4V Сплав	860 ~	795 ~	15 ~	25 ~	40+/-5%	Не более 6.3

Перечень национальных и международных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие.

№	Номер стандарта	Название стандарта
1	ISO 10451:2010	Стоматология - Содержание технической документации по системам зубных имплантатов
2	ISO 7405:2018	Стоматология - Оценка биологической совместимости медицинских изделий, используемых в стоматологии
3	ISO 14801:2016	Стоматология - Имплантаты - Испытания динамической усталости для внутрикостных зубных имплантатов
4	ISO 13485:2016	Медицинские устройства -- Системы управления качеством -- Требования к регулированию
5	EN ISO 14971:2019	Медицинские приборы – Применение управления рисками к медицинским изделиям
6	EN ISO 15223-1:2021	Медицинские изделия - Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации - Часть 1: Общие требования
7	ISO 15223-2:2010	Медицинские изделия - Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации - Часть 2: Разработка, выбор и валидация символов
8	ISO 16142-1:2016	Медицинские устройства- Общеизвестные принципы безопасности и эффективности медицинских устройств- Часть 1: Общие существенные принципы и дополнительные специфические существенные принципы для всех медицинских изделий, не относящихся к диагностике «in vitro», а также руководство по выбору стандартов
9	ISO 14155:2020	Испытания клинические медицинских изделий для людей. Надлежащая клиническая практика
10	ISO14644-1:2015	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды – Часть 1: Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц
11	ISO 17665-1:2006	Стерилизация медицинской продукции - Стерилизация паром - Часть 1: Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий
12	ISO 17665-2:2009	Стерилизация медицинской продукции - Стерилизация паром - Часть 2: Руководство по применению ISO 17665-1
13	ISO 11138-1:2017	Процесс стерилизации медицинской продукции. Биологические индикаторы - Часть 1: Общие требования
14	EN 1041:2008	Информация, предоставляемая изготовителем медицинских устройств
15	EN 1642:2011	Стоматология – Медицинские стоматологические устройства – Зубные имплантаты
16	ASTM F136-13	Стандартные технические условия для кованого сплава титан-6

		алюминий-4 ванадий ELI (ультрамелкозернистого) для изготовления хирургического имплантатов (UNS R56401)
17	ISO 10993-5:2009	Биологическая оценка медицинских изделий - Часть 5. Испытания на цитотоксичность in vitro.
18	ISO 10993-10:2021	Биологическая оценка медицинских устройств - Часть 10: Испытания на раздражение и сенсибилизацию кожи (Испытание на раздражение слизистой оболочки полости рта)
19	ISO 10993-10:2021	Биологическая оценка медицинских устройств - Часть 10: Испытания на раздражение и сенсибилизацию кожи (Исследование максимального сенсибилизирующего воздействия на кожу морских свинок (GPMT))
20	ISO 10993-11:2017	Биологическая оценка медицинских устройств - Часть 11: Испытания генотоксичности, канцерогенности и репродуктивной токсичности (ISO 10993-3:2014)
21	ISO 10993-11:2017	Биологическая оценка медицинских устройств - Часть 11: Испытания на генотоксичность, канцерогенность и репродуктивную токсичность (испытание на пирогенность)
22	ISO 10993-3:2014	Биологическая оценка медицинских устройств - Часть 3: Испытания на генотоксичность, канцерогенность и репродуктивную токсичность (тест на обратную бактериальную мутацию)
23	ISO 10993-3:2014	Биологическая оценка медицинских устройств - Часть 3: Испытания на генотоксичность, канцерогенность и репродуктивную токсичность (тест на микроядра эритроцитов млекопитающих)

등부 2023년 제14896호

Registered No. 2023-14896

인 증

NOTARIAL CERTIFICATE

위 선언서에 기재된 탑플란 주식회사
대표이사 장영환의 대리인 함호근은 본
공증인의 면전에서 위 사서증서에 위
본인이 기명날인한 것임을 자인하였다.

HOKEUN HAM, attorney-in-fact of
TOPLAN CO.,LTD. YOUNG HWAN
JANG / CEO, appeared before me and
admitted said principal's subscription to the
attached DECLARATION.

2023년 9월 12일 이 사무소에서 위 인
증한다.

This is hereby attested on this 12th day of
September, 2023 at this office.

공증사무소명칭
공증인가 법무법인 한미

Name of the office
HANMI LAW AND NOTARY OFFICE

소속
서울중앙지방법검찰청

Belong to
Seoul Central District Prosecutors' Service

소재지표시
서울특별시 종로구 율곡로 6, 트윈트
리타워 B동 101호

Address of the office
twintree tower(B) #101,6 Yulgok-ro,
Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea

공증담당변호사 박종순

Notary Public PARK JONG SOON

박 종 순



Park Jong Soon

(Signature of Notary Public)

This office has been authorized by the
Minister of Justice, the Republic of Korea,
to act as Notary Public since March 14,
2007 under Law No. 7428.

[Приложение по форме № 41]

Твинтри тауэр (Б), № 101, 6 Юлгок-ро
(twintree tower (B) # 101,6 Yulgok-ro)

/Фрагмент печати:
Государственный нотариус
Пак Чон Сун/

Тел.: 733-3955-6 Факс: 733-3950

Юридическая фирма и нотариальная контора «Ханми»

Регистрационный № 2023-14896

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

*/Рельефный оттиск на самоклеющемся лейбле: ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА И НОТАРИАЛЬНАЯ
КОНТОРА «ХАНМИ» (HANMI LAW AND NOTARY OFFICE)/*

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА И НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА «ХАНМИ»

Твинтри тауэр (Б), № 101, 6 Юлгок-ро,
Чонно-гу, Сеул, Республика Корея
(twintree tower(B) #101, 6 Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea)

210 мм x 297 мм (офисная бумага [1 сорт], 70 г/м²)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы (Заявитель) «Топлан Ко., Лтд.» (Toplan Co., Ltd.)

Генеральный директор: г-н Юн Хван Чан (Young Hwan Jang)

настоящим официально заявляем:

1. Что приложенный (-ые) документ (-ы):

Инструкция по применению

2. [V] является (-ются) подлинным (-и) и точным (-и)

/Фрагмент печати: Государственный нотариус Пак Чон Сун/

[] является (-ются) подлинным (-и) переводом (-ами) текста (-ов), в оригинале написанного (-ых) на корейском языке, данные которого соответствуют действительности.

12.09.2023

Подпись «Топлан Ко., Лтд.»

Генеральный директор, г-н Юн Хван Чан

/Подпись/

/Штамп: «Топлан Ко., Лтд.»

Га дон, 13, Нынгил-ро 115 бён-гил, Данвон-гу,

Ансан-си, Гёнги-до, Республика Корея

(Ga dong, 13, Neunggil-ro 115beon-gil, Danwon-gu,

Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea)

Президент Юн Хван Чан/

/Печать: «Топлан Ко., Лтд.»/

/Логотип: «Топлан»/	Заявление	Ред. №	0
		Стр.	1

Я настоящим удостоверяю, что приведенная ниже информация является верной и точной.

Инструкция по применению

Кому: Росздравнадзор

Мы, компания «Топлан Ко., Лтд.», настоящим заявляем, что инструкция по применению, предоставленная в Росздравнадзор, является полной, непротиворечивой и достоверной.

/Фрагмент печати: Государственный нотариус Пак Чон Сун/

05 сентября 2023 г.

«Топлан Ко., Лтд.»

Подпись: /Подпись/

Должность: генеральный директор (президент)

Имя: Чан Юн Хван

/Штамп: «Топлан Ко., Лтд.»

Га дон, 13, Нынгил-ро 115 бён-гил, Данвон-гу,

Ансан-си, Гёнги-до, Республика Корея

Президент Юн Хван Чан/

/Логотип: «Топлан»/ «Топлан Ко., Лтд.»

/Логотип: «Топлан»/

«Топлан Ко., Лтд.»

Га-дон 13, Нынгил-ро 115 бён-гил, Данвон-гу, Ансан-си, Гёнги-до, 15420, Республика Корея

Тел.: +82 31 365-3255 Факс: +82 31 365-3256 www.toplan.com

Регистрационный № 2023-14896

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ХОКЫН ХАМ (HOKEUN HAM), доверенное лицо компании «ТОПЛАН КО., ЛТД.», ЮН ХВАН ЧАН / Генеральный директор, в нашем присутствии подтвердил, что указанный доверитель поставил свою подпись на прилагаемом ЗАЯВЛЕНИИ.

Удостоверено сегодня, 12 сентября 2023 года в данной конторе.

/Фрагмент печати: Государственный нотариус Пак Чон Сун/

Название конторы

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА И НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА «ХАНМИ»

Относится к

Центральной районной прокуратуре Сеула

Адрес конторы

Твинтри тауэр (Б), № 101, 6 Юлгок-ро,

Чонно-гу, Сеул, Республика Корея

Государственный нотариус ПАК ЧОН СУН (PARK JONG SOON)

/Подпись/

(Подпись государственного нотариуса)

/Печать: Государственный нотариус Пак Чон Сун/

Данное учреждение уполномочено Министерством юстиции Республики Корея оказывать нотариальные услуги с 14 марта 2007 года в соответствии с Законом № 7428.

210 мм x 297 мм (офисная бумага [1 сорт], 70 г/м²)

Перевод данного текста выполнен переводчиком Шоинбодовой Мархабо Пайшанбеевной.

Российская Федерация
Город Москва

Третьего ноября две тысячи двадцать третьего года

Я, Симонян Диана Артуровна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Корсик Марии Александровны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Шоинбодовой Мархабо Пайшанбеевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2023- 47-2249

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Д.А. Симонян

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 61 лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса