

Общество с ограниченной ответственностью "МК Клевер"
(ООО "МК Клевер")

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ООО "МК Клевер"

М.В. Александрова

«26» октября 2020 г.



Установка оториноларингологическая
по ТУ 26.60.13-001-48661872-2019

Фотографические изображения

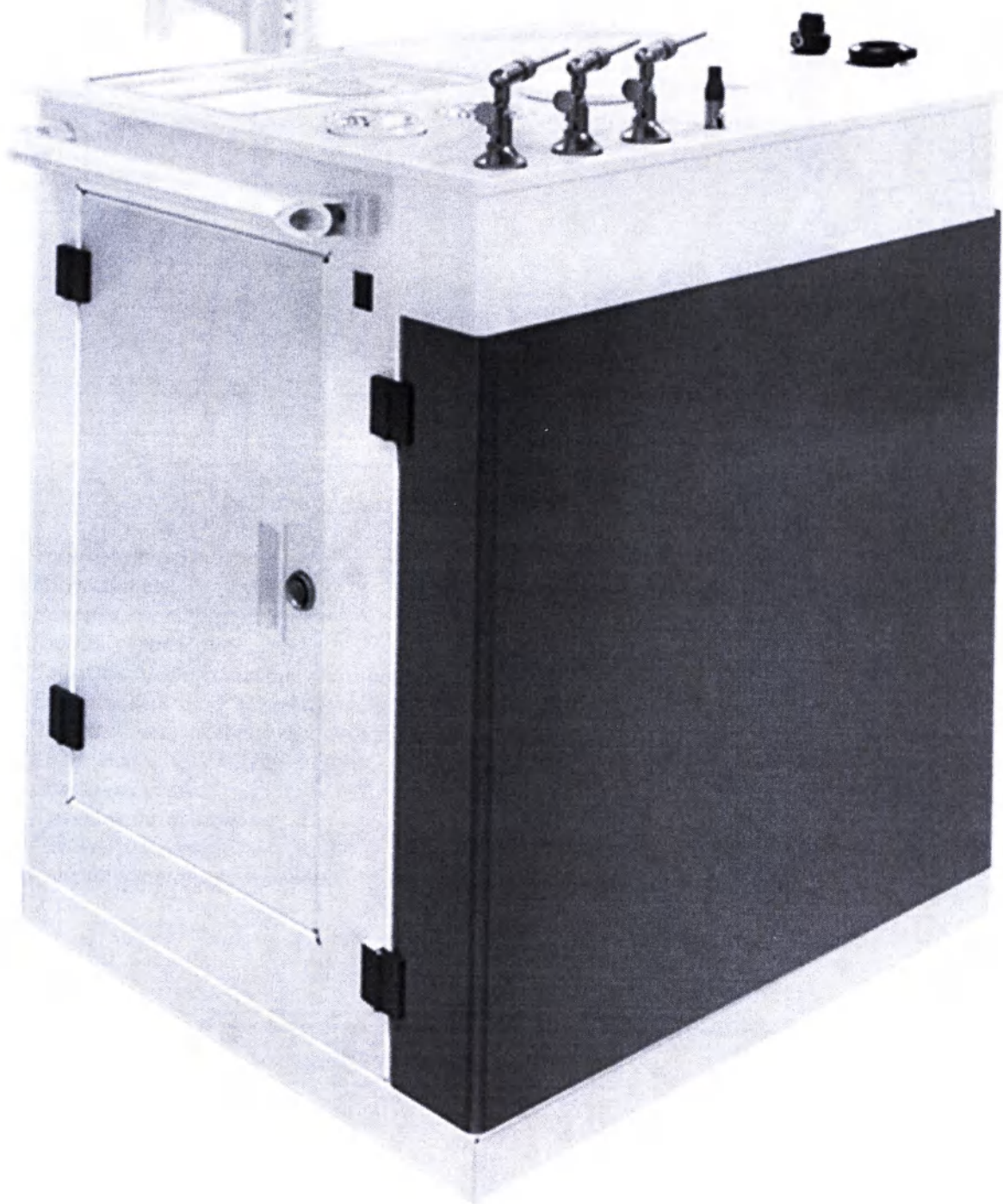


Рисунок 1. Общий вид, вариант исполнения УОРЛ-1.

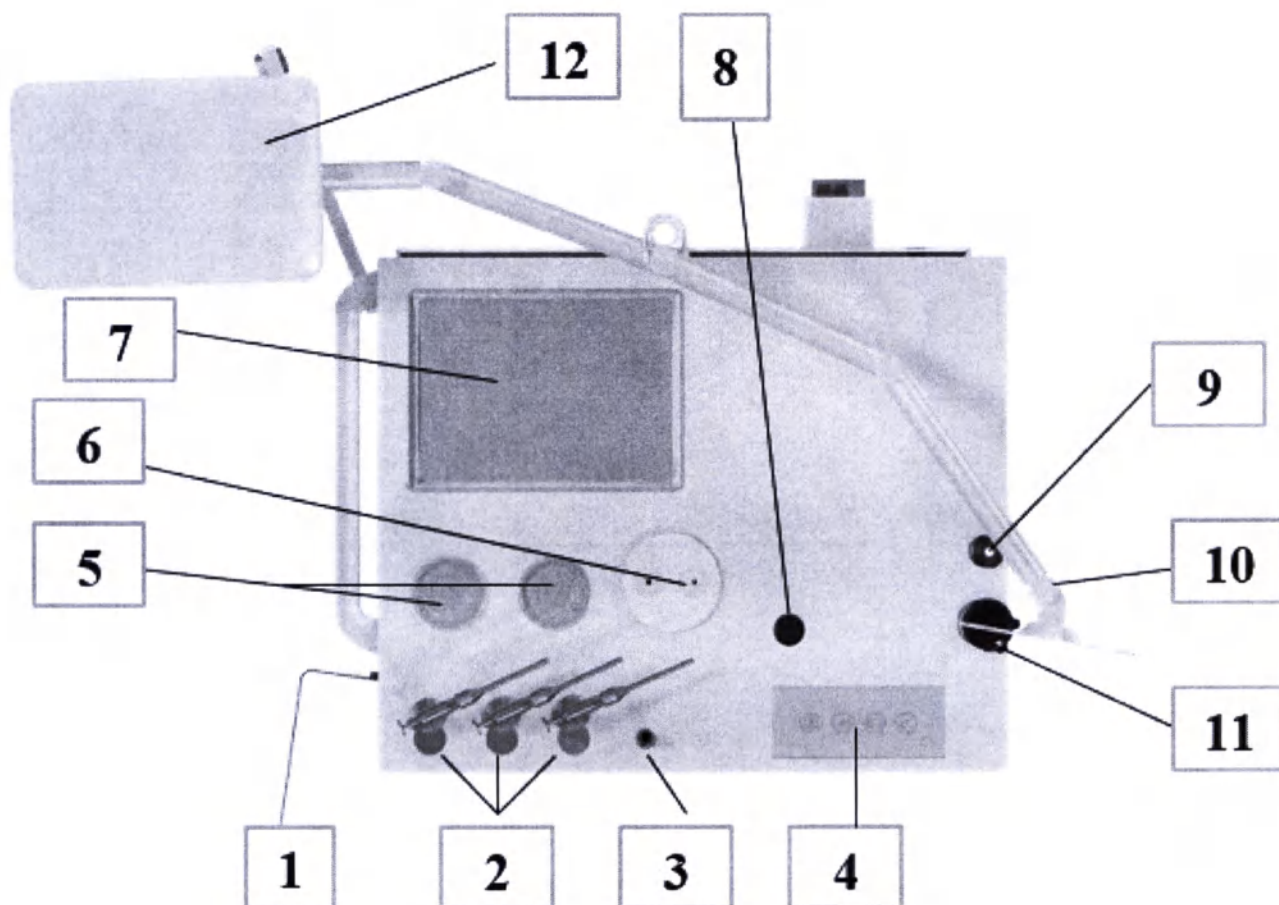


Рисунок 2. Вид сверху, вариант исполнения УОРЛ-1.

1. Рабочая поверхность
2. Распылители
3. Наконечник аспирационный
4. Панель управления
5. Стаканы металлические с крышкой
6. Емкость для эндоскопов с пластиковой крышкой
7. Лоток металлический для инструментов с крышкой
8. Сопло подогрева инструмента
9. Источник света
10. Кронштейн монитора
11. Головка видеокамеры
12. Столик инструментальный

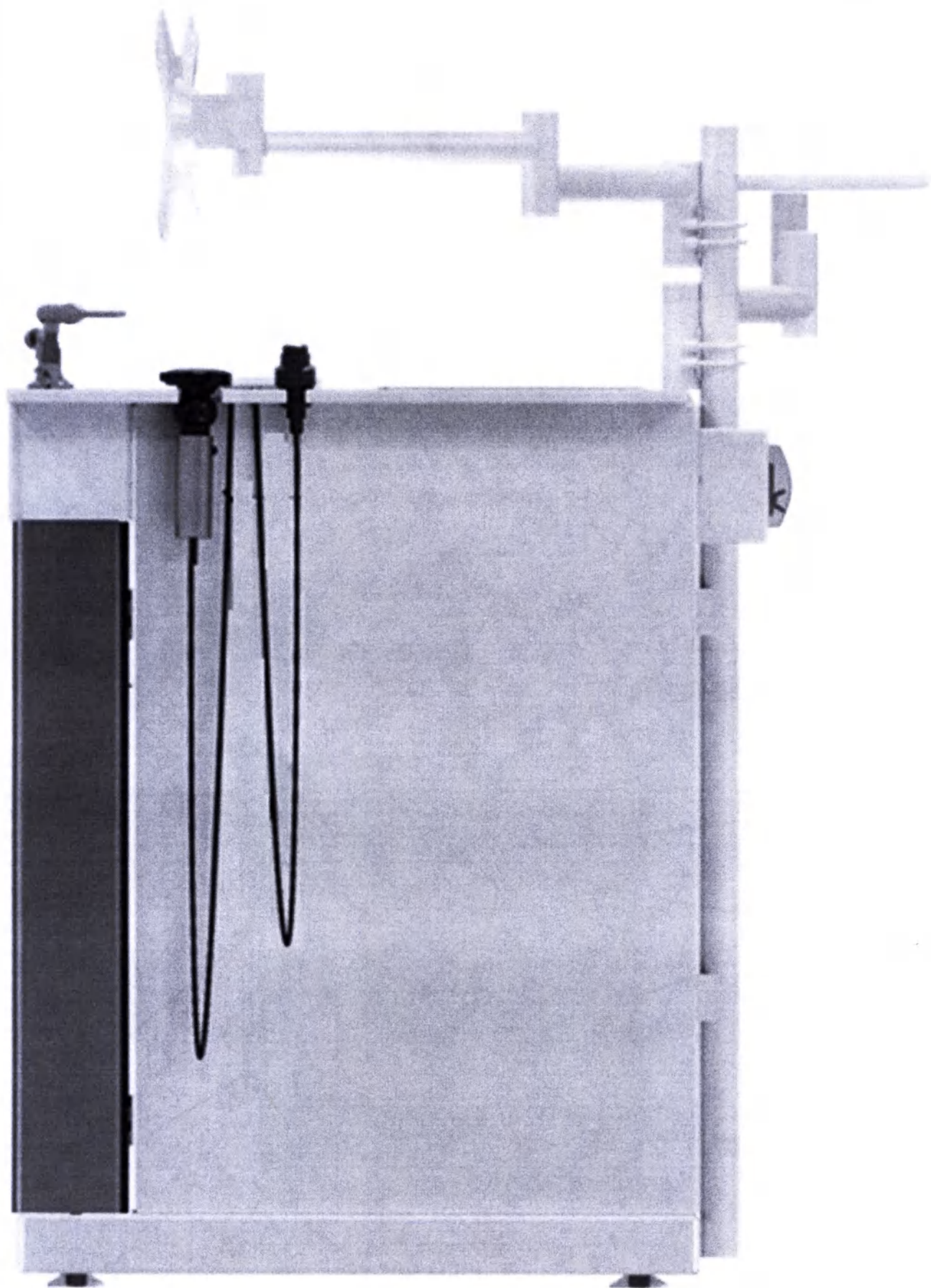


Рисунок 3. Вид справа, вариант исполнения УОРЛ-1.

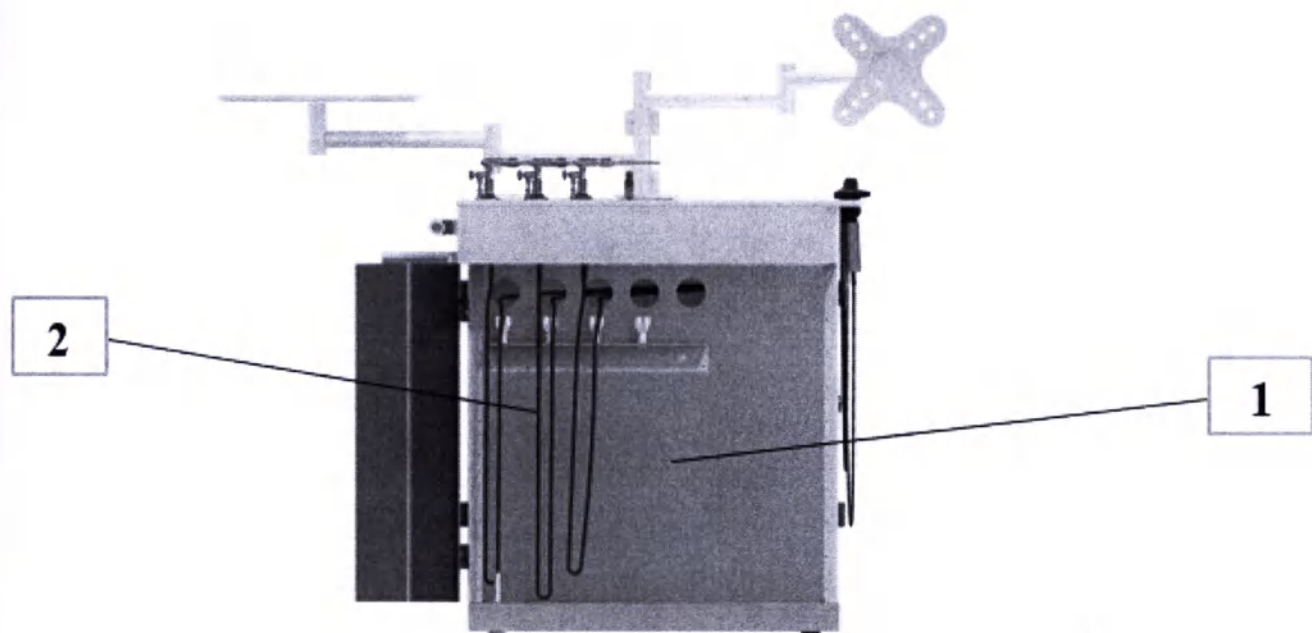


Рисунок 4. Спереди, вариант исполнения УОРЛ-1.

1. Технический отсек
2. Шланги

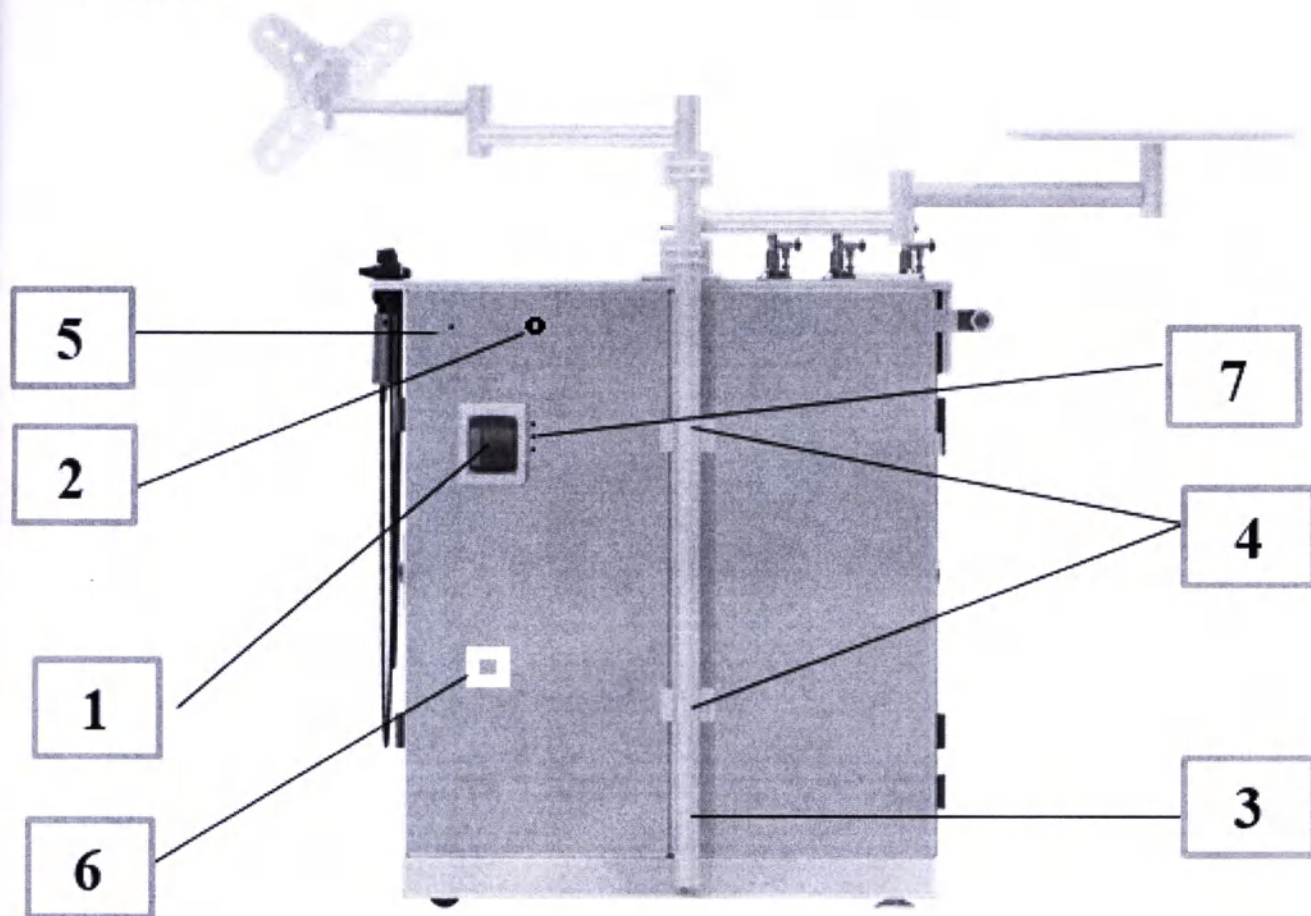


Рисунок 5. Вид сзади, вариант исполнения УОРЛ-1.

1. Выключатель дифференциального тока (УЗО)
2. Вывод видеосигнала
3. Штанга
4. Хомуты
5. Заземление «Выравнивание потенциалов»
6. Розетка для подключения «Монитор»
7. Предохранители

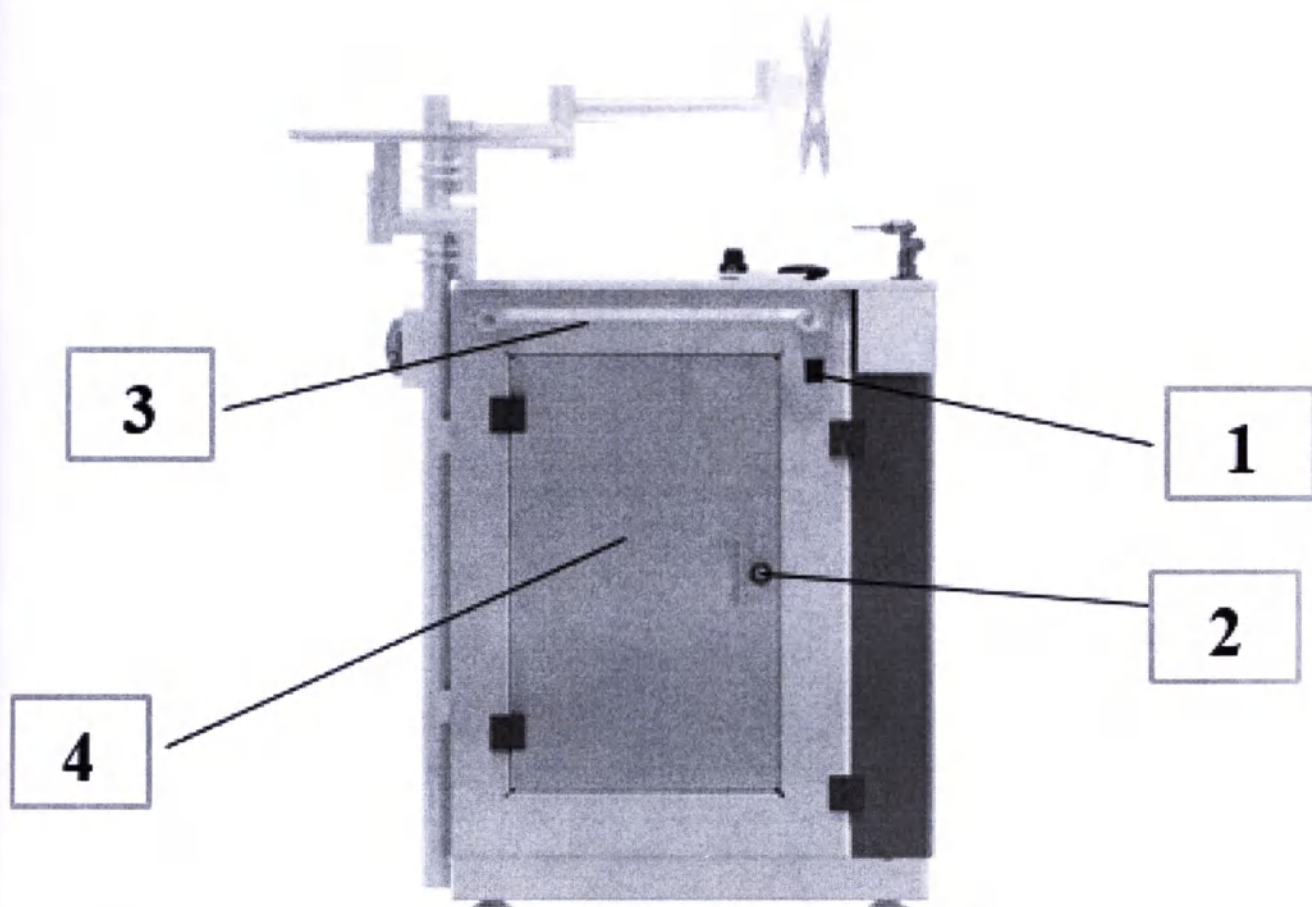


Рисунок 6. Вид слева, вариант исполнения УОРЛ-1

1. Кнопка «Сеть»
2. Фиксатор двери
3. Ручка
4. Дверца аспирационного отсека

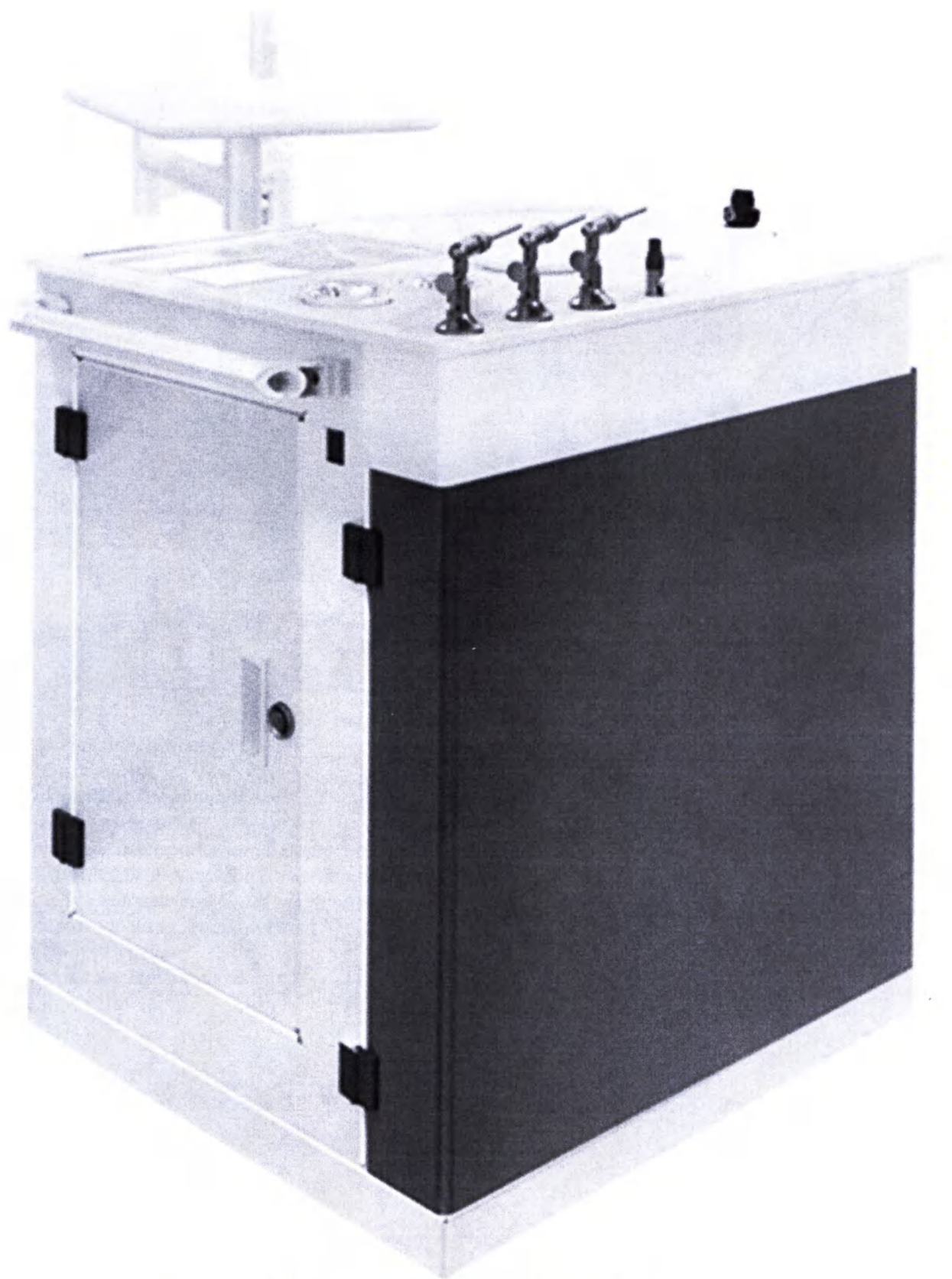


Рисунок 7. Общий вид, вариант исполнения УОРЛ-2.

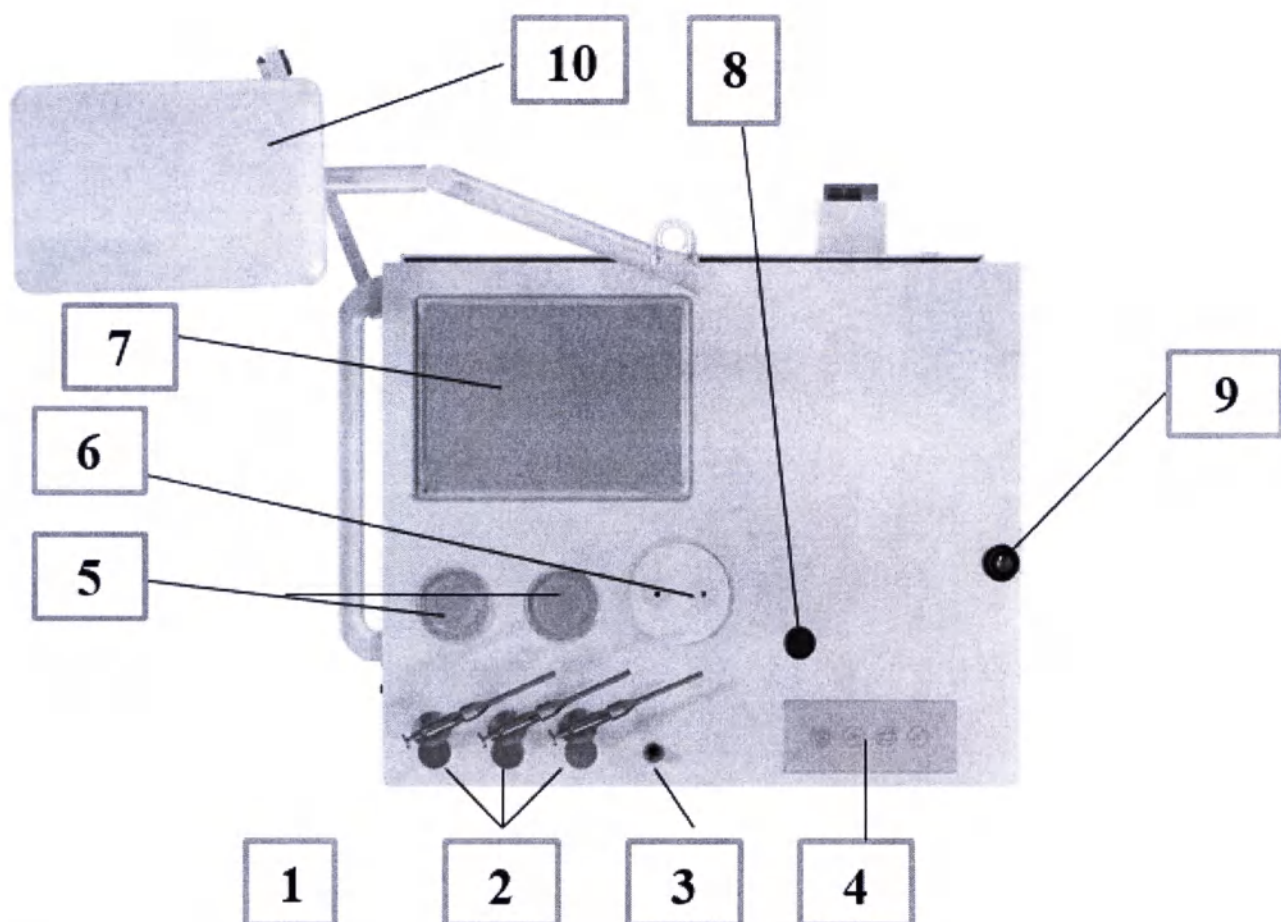


Рисунок 8. Вид сверху, вариант исполнения УОРЛ-2.

1. Рабочая поверхность
2. Распылители
3. Наконечник аспирационный
4. Панель управления
5. Стаканы металлические с крышкой
6. Емкость для эндоскопов с пластиковой крышкой
7. Лоток металлический для инструментов с крышкой
8. Сопло подогрева инструмента
9. Источник света
10. Столик инструментальный

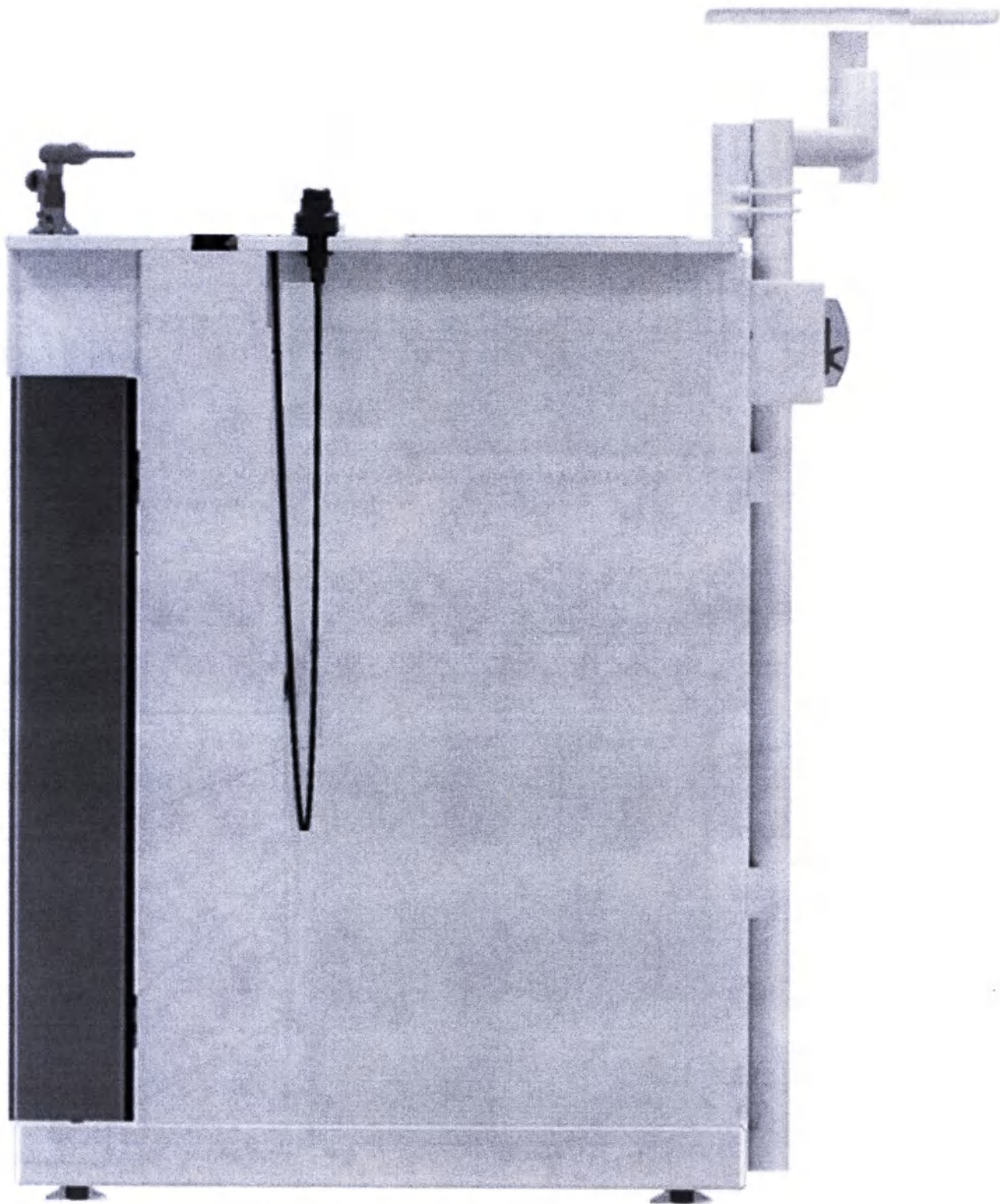


Рисунок 9. Вид справа, вариант исполнения УОРЛ-2.

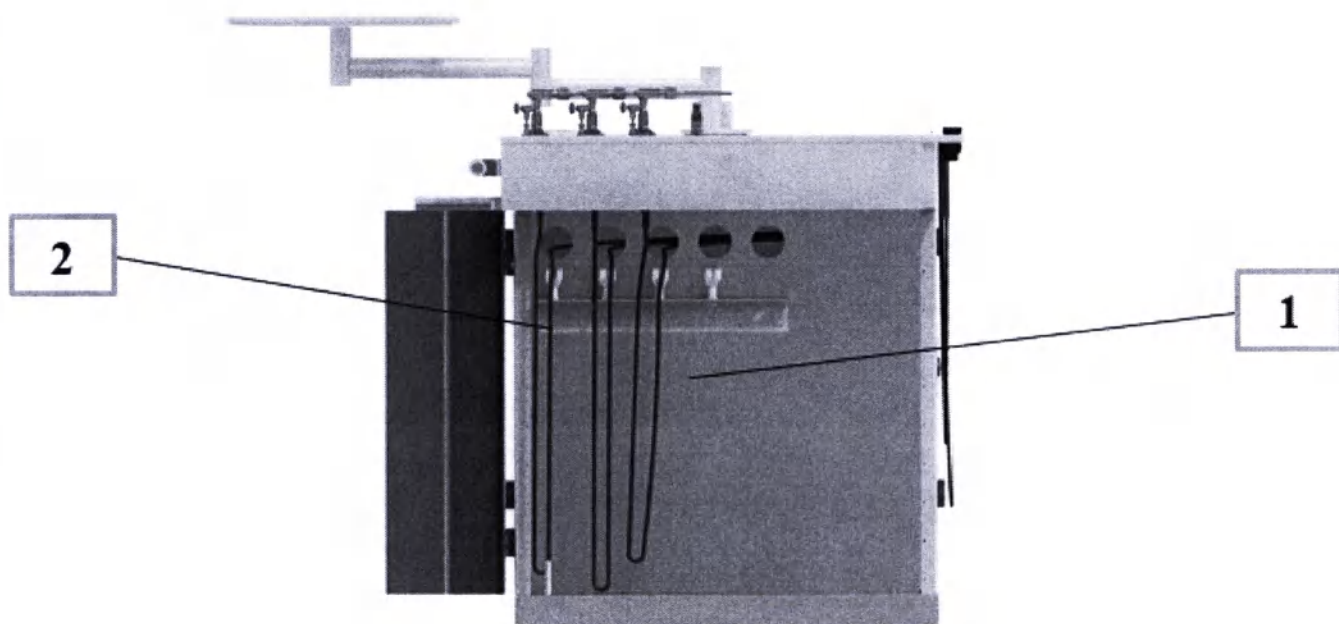


Рисунок 10. Спереди, вариант исполнения УОРЛ-2.

1. Технический отсек
2. Шланги

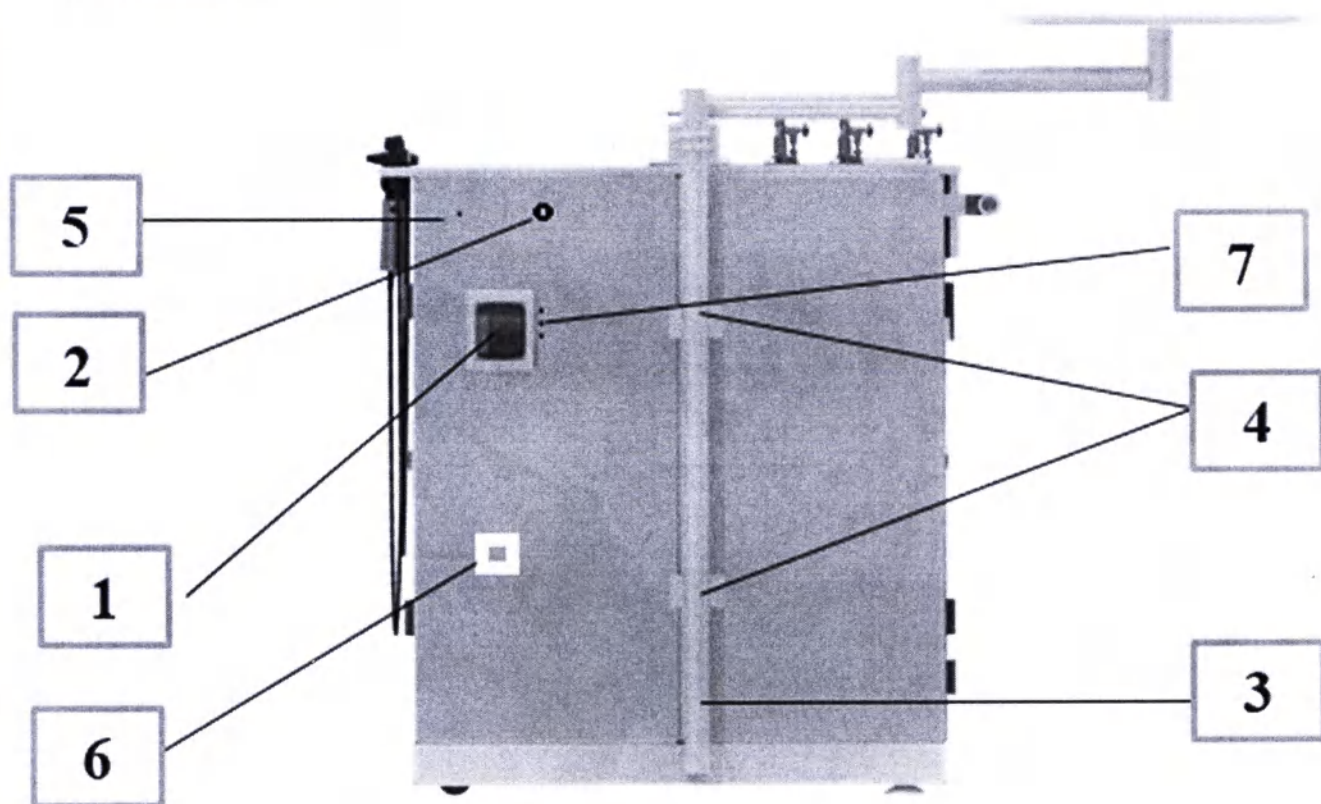


Рисунок 11. Вид сзади, вариант исполнения УОРЛ-2.

1. Выключатель дифференциального тока (VZO)
2. Вывод видеосигнала (не применим для УОРЛ-2)
3. Штанга
4. Хомуты
5. Заземление «Выравнивание потенциалов»
6. Розетка для подключения «Монитор» (не применим для УОРЛ-2)
7. Предохранители

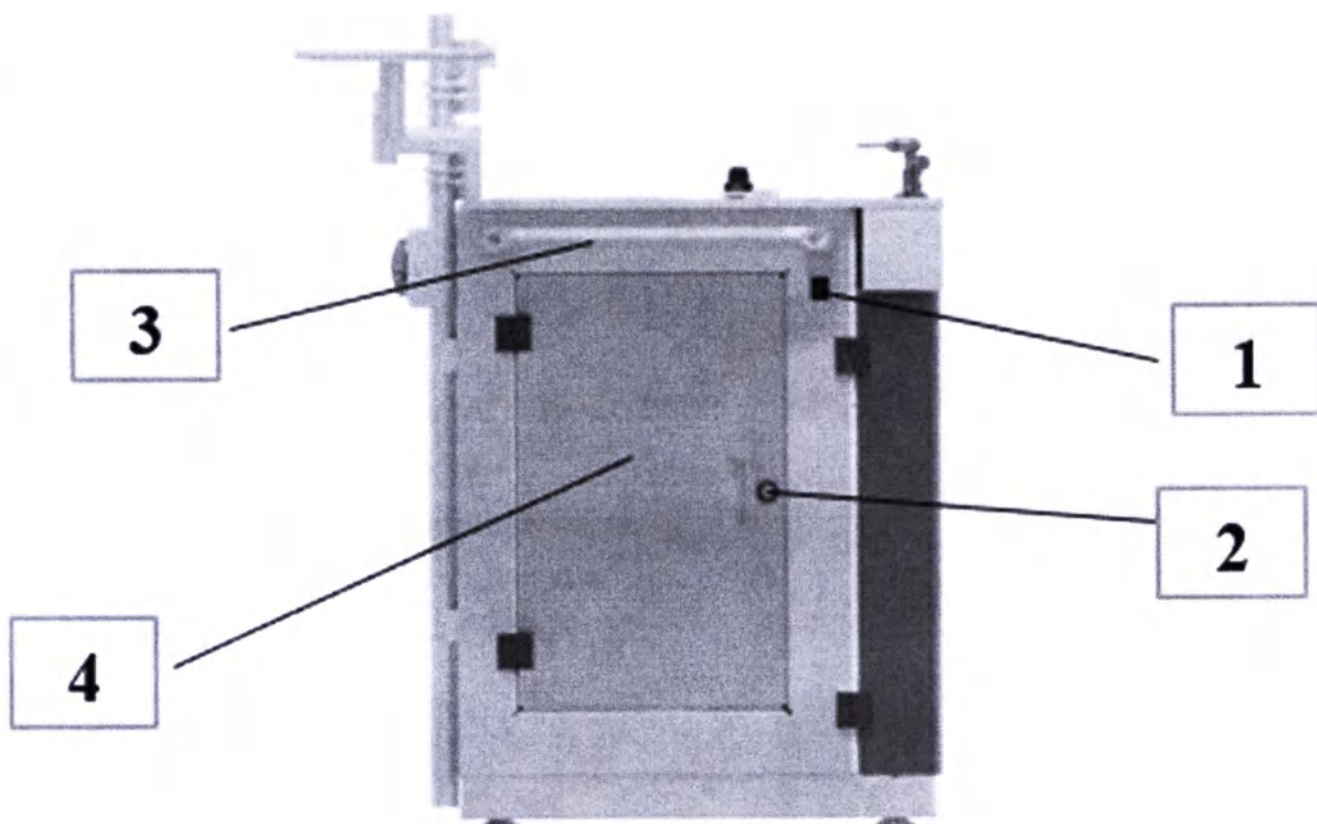


Рисунок 12. Вид слева, вариант исполнения УОРЛ-2.

1. Кнопка «Сеть»
2. Фиксатор двери
3. Ручка
4. Дверца аспирационного отсека

Комплектующие медицинского изделия

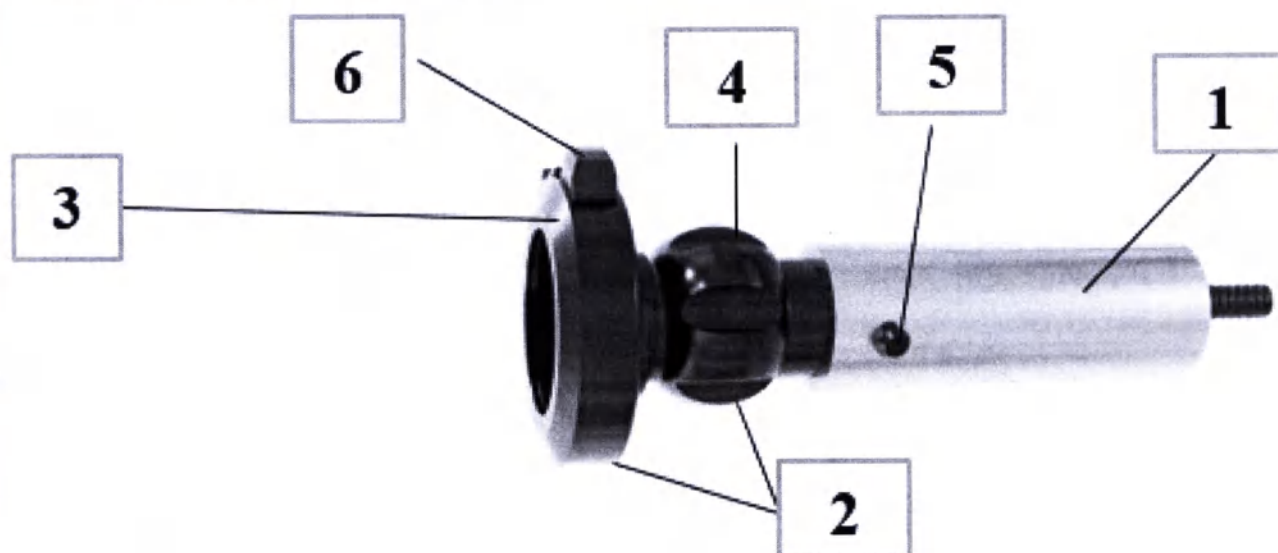


Рисунок 13. Головка видеокамеры

1. Корпус
2. Объектив
3. Захват
4. Фокусировочное кольцо
5. Кнопка «Баланс белого»
6. Фиксатор захвата

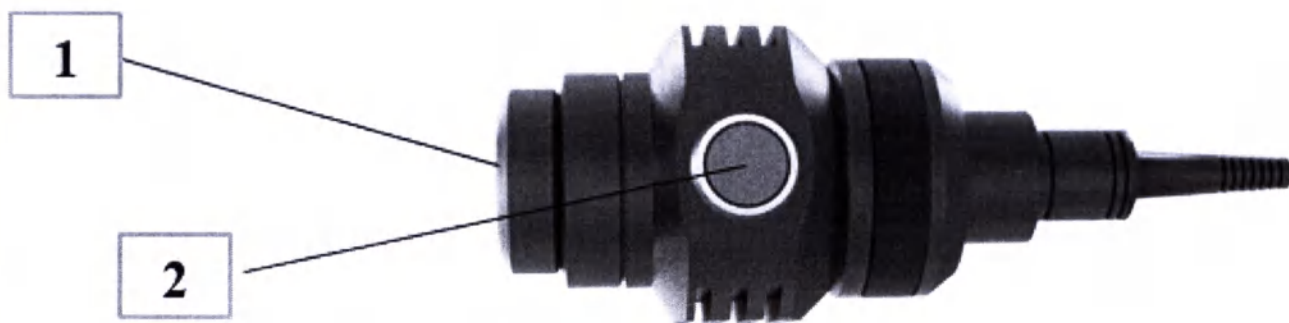


Рисунок 14. Источник света

1. Разъем для подключения к эндоскопу
2. Кнопка регулировки яркости

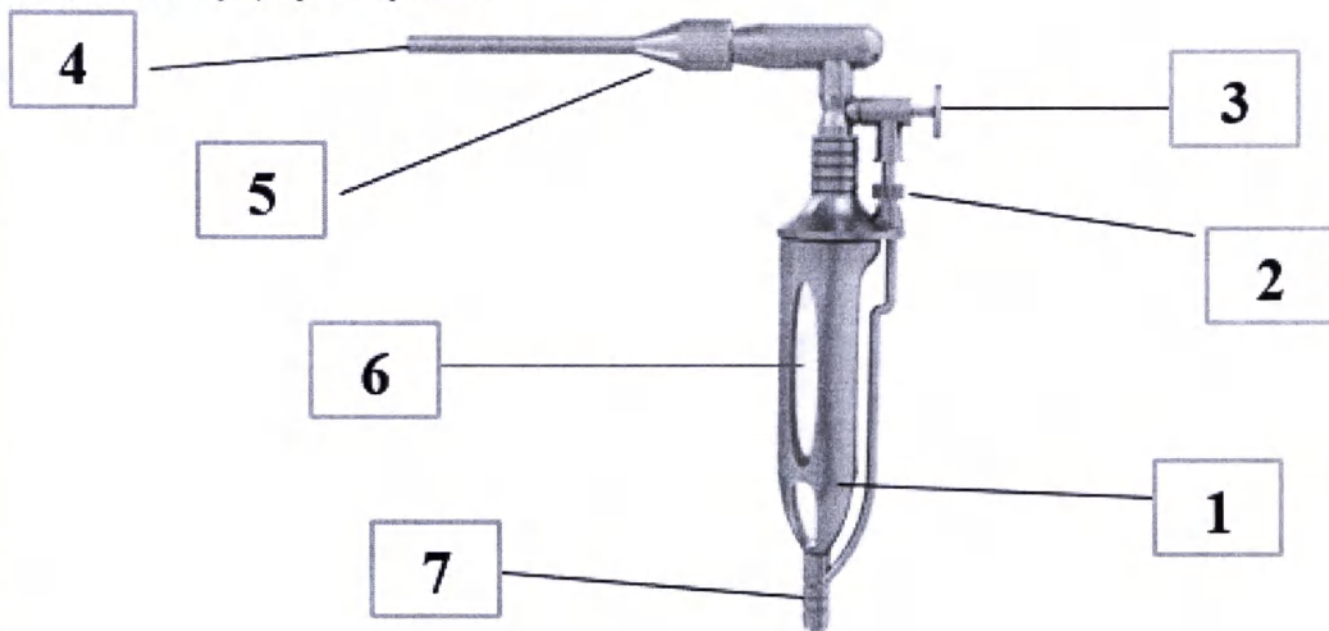


Рисунок 15. Распылитель с наконечниками

1. Корпус распылителя
2. Гайка прижимная
3. Кнопка включения
4. Наконечник распылителя
5. Гайка наконечника распылителя
6. Флакон
7. Штуцер с зажимной гайкой

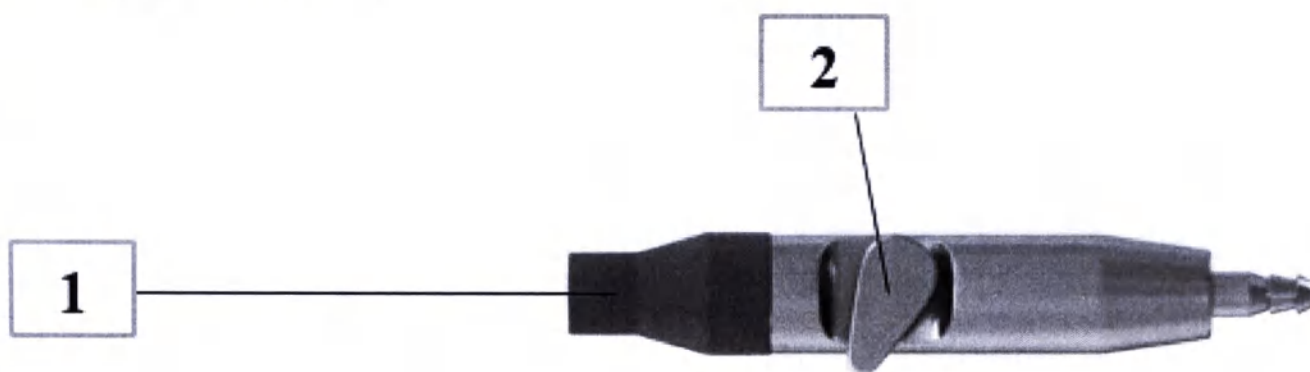


Рисунок 16. Наконечник аспирационный

1. Наконечник силиконовый наконечника аспирационного
2. Рычаг регулировки

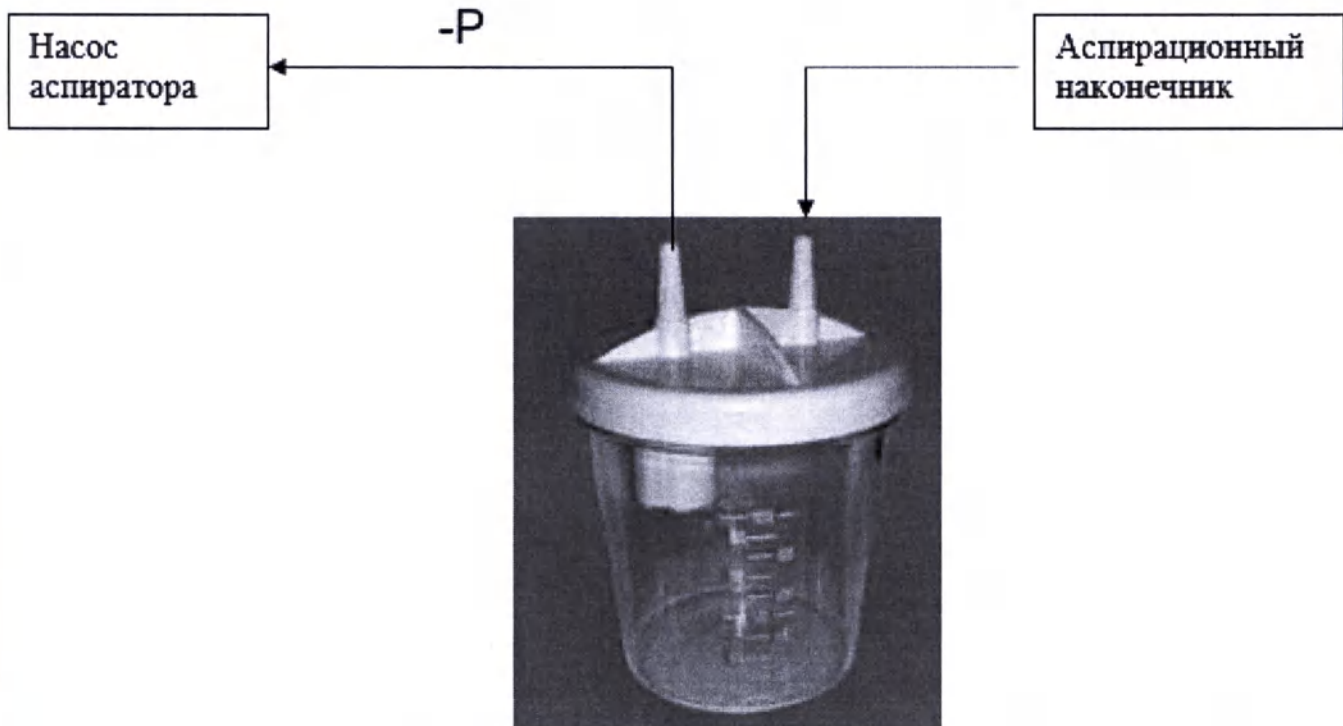


Рисунок 17. Банка аспирационная не менее 2,0 л

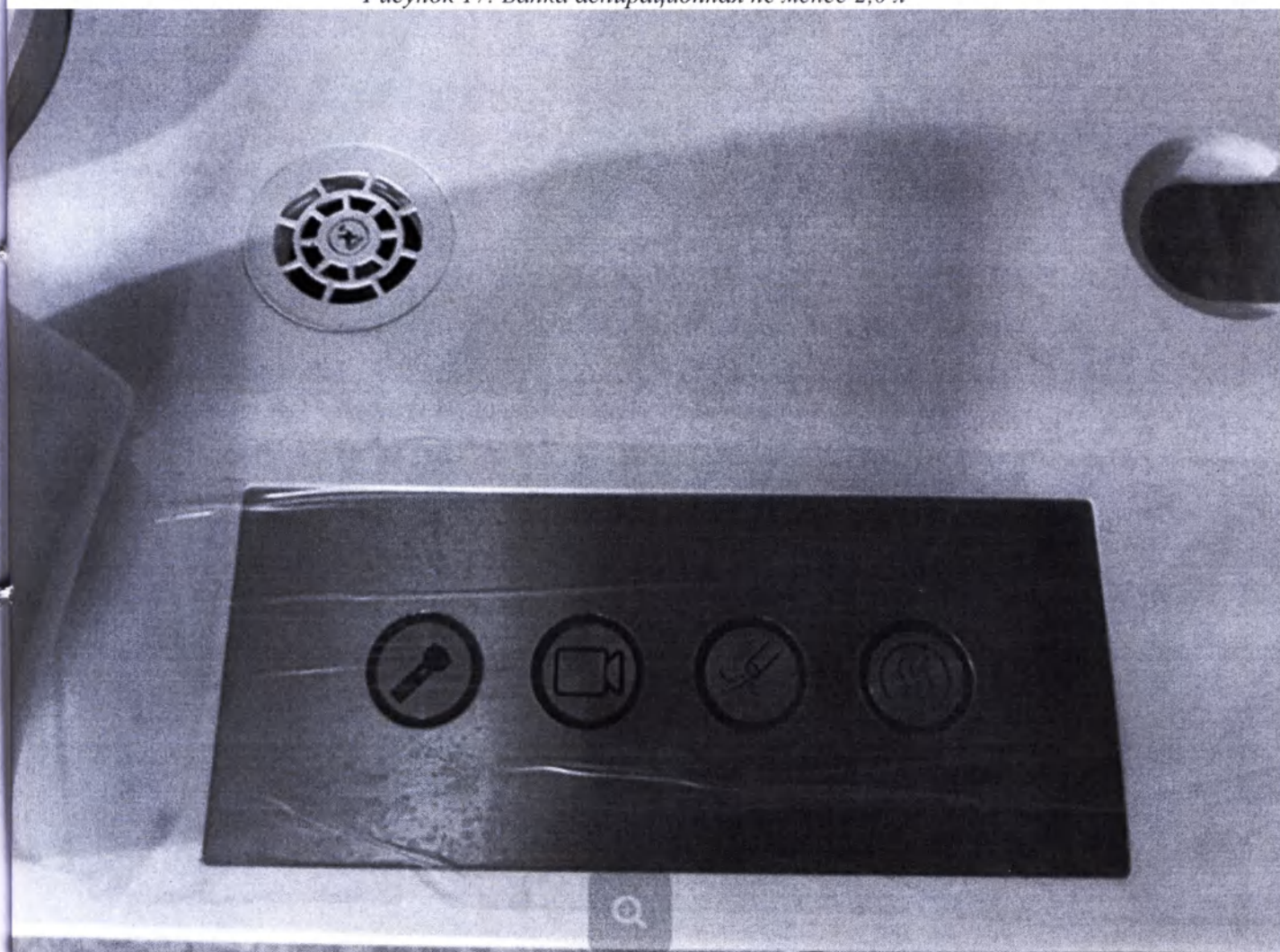
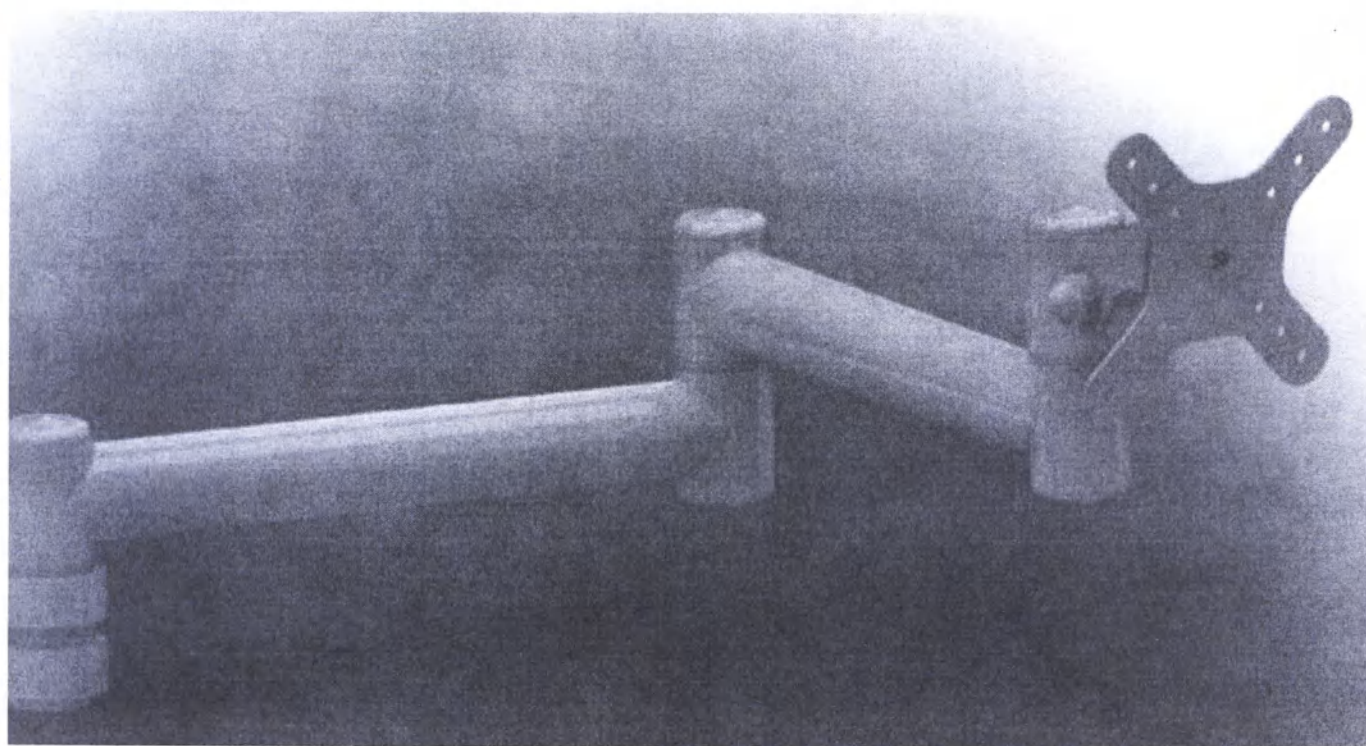


Рисунок 18. Панель управления



Рисунок 19. Видеокабель (не применимо для УОРЛ-2)



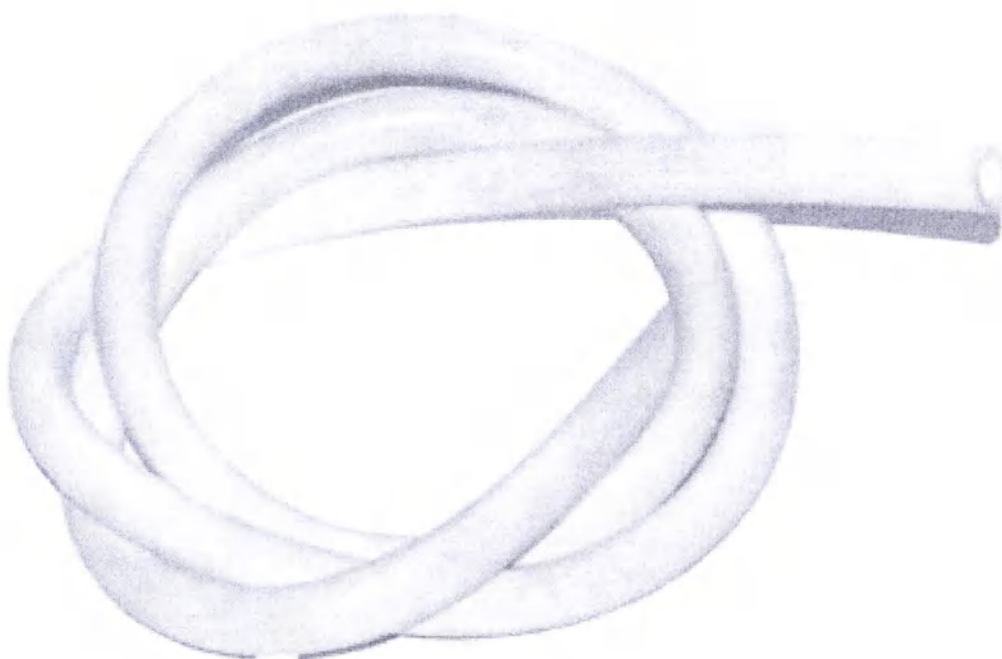


Рисунок 21. Шланги (ПУ № ФСР 2010/06803 от 26.05.2017)

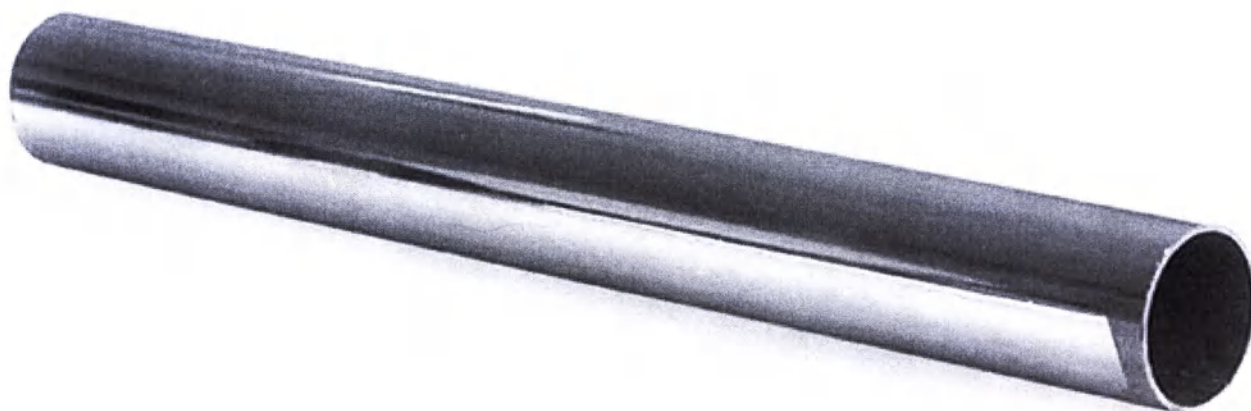


Рисунок 22. Штанга



Рисунок 23. Монитор

УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ УОРА-1

по ТУ 26.60.13-001-48661872-2019

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: ООО «МК КЛЕВЕР»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: 190001

ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 2019

НОМИНАЛЬНОЕ ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В: 220 ± 22 .

ЧАСТОТА ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ, Гц: 50

ПОТРЕБАЕМАЯ МОЩНОСТЬ НЕ БОЛЕЕ, Вт: 1000

РЕЖИМЫ РАБОТЫ УСТАНОВКИ:

- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ: 60 МИН

- ПОВТОРНО-КРАТКОВРЕМЕННЫЙ, ЦИКЛ: ВКЛЮЧЕНО 50 МИН, ПЕРЕРЫВ 10 МИН.

mk-klever.ru



Рисунок 24. Маркировочная табличка

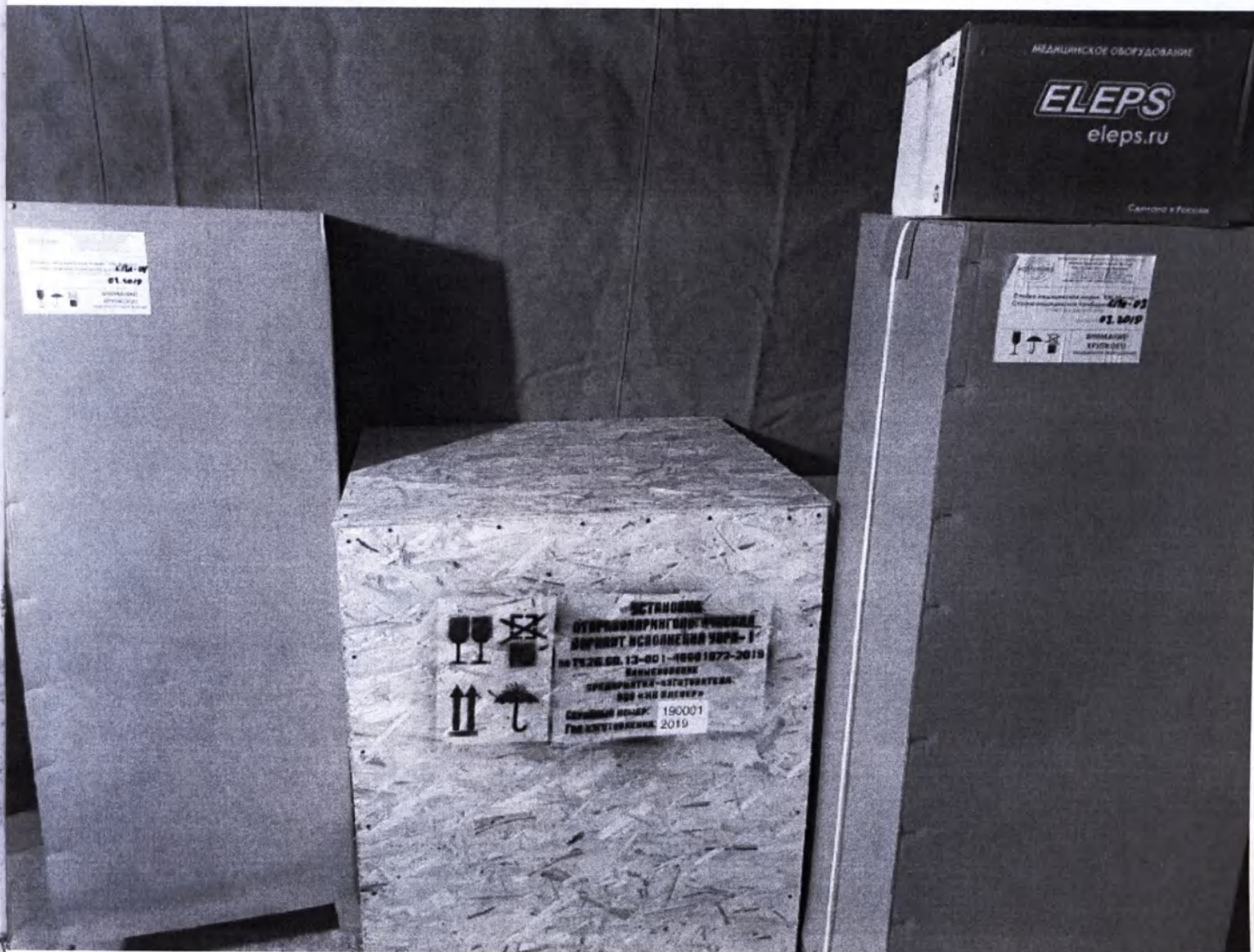


Рисунок 25. Упаковка установки в потребительскую упаковку



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

18 (Восемнадцать) ЛИСТОВ.
цифрами прописью

Должность Директор

Подпись А.В. /Александрова М.В./



М.П. «МК Клевер»