


Фото 1 Трубка силиконовая для хирургических дренажей и комплектации медицинских изделий

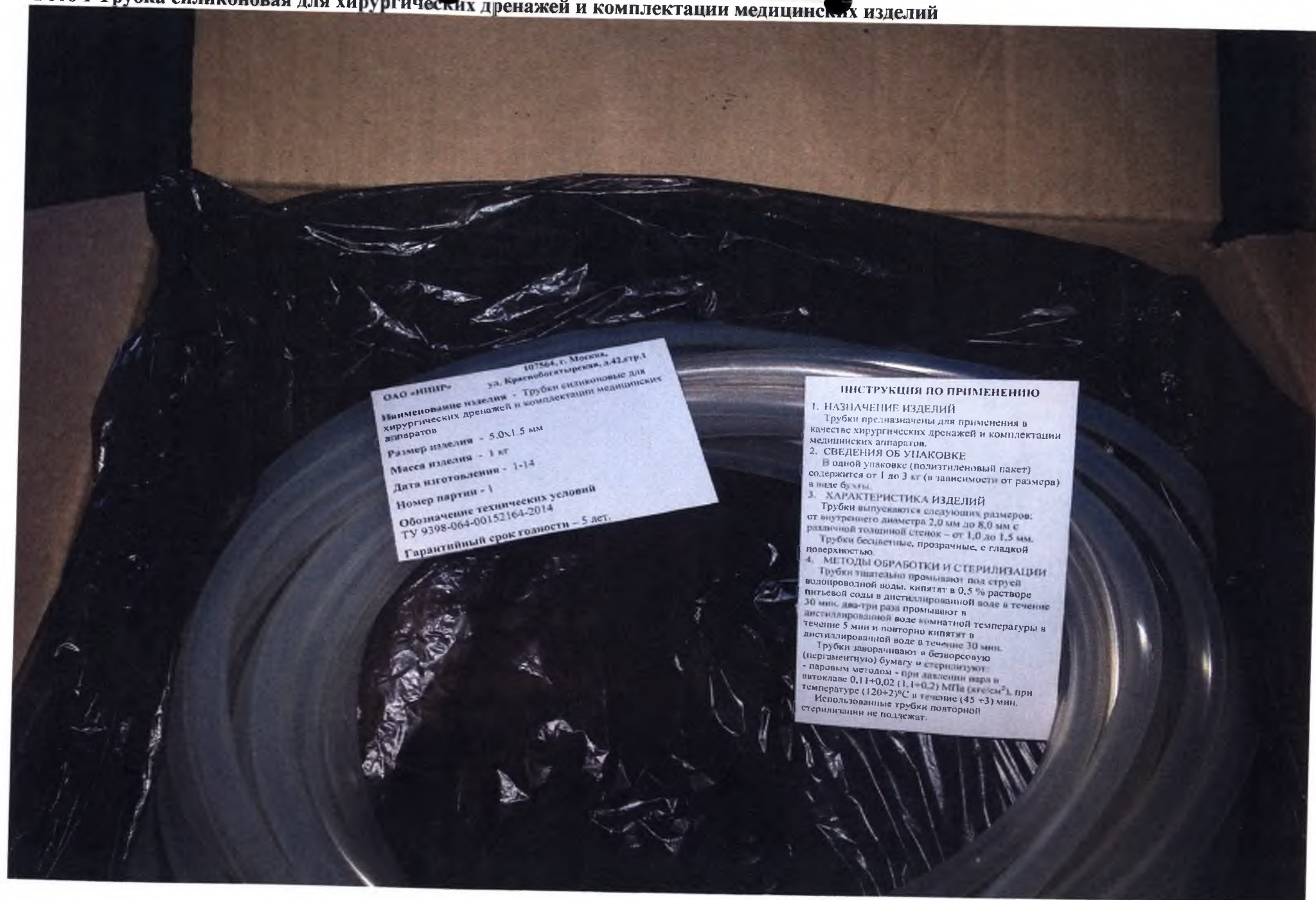

ОАО «НИПР»
107564, г. Москва,
ул. Краснобогатырская, д.42, стр.1
Наименование изделия - Трубки силиконовые для
хирургических дренажей и комплектации медицинских
аппаратов
Размер изделия - 5,0х1,5 мм
Масса изделия - 1 кг
Дата изготовления - 1-14
Номер партии - 1
Обозначение технических условий
ТУ 9398-064-00152164-2014
Гарантийный срок годности - 5 лет.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ
Трубки предназначены для применения в качестве хирургических дренажей и комплектации медицинских аппаратов.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ
В одной упаковке (полиэтиленовый пакет) содержится от 1 до 3 кг (в зависимости от размера) в виде бухты.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЙ
Трубки выпускаются следующих размеров: от внутреннего диаметра 2,0 мм до 8,0 мм с различной толщиной стенок - от 1,0 до 1,5 мм. Трубки бесцветные, прозрачные, с гладкой поверхностью.

4. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ
Трубки тщательно промывают под струей водопроводной воды, кипятят в 0,5 % растворе пищевой соды в дистиллированной воде в течение 30 мин, два-три раза промывают в дистиллированной воде комнатной температуры в течение 5 мин и повторно кипятят в дистиллированной воде в течение 30 мин. Трубки заворачивают в безворсовую (пергаментную) бумагу и стерилизуют паровым методом - при давлении пара и температуре 0,11±0,02 (1,1±0,2) МПа (кг/см²), при температуре (120±2)°C в течение (45±3) мин. Использованные трубки повторной стерилизации не подлежат.

ОАО «ИИИР»
19764, г. Москва,
г. Косовский проезд, д. 10/1
Нанесенные наклеи - 20 (два экземпляра для
экспертного отдела и один экземпляр для
инспекции)
Размер упаковки - 50х17 см
Масса упаковки - 1 кг
Дата изготовления - 1.8
Номер партии - 1
Обозначение: 19764-001-001-001-001
19.09.08-001-001-001-001
Гарантийный срок поставки - 3 мес

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

2 (два) листа (ов)

Исполнительный директор ОАО «НИИР»

Корчашкин В.В.

