

Рисунок 1.
Грелки резиновые ГР – «Альфа»
по ГОСТ 3303-94 вариант исполнения:
Грелка резиновая ГР – «Альфа» №1 тип А
Общий вид с маркировкой


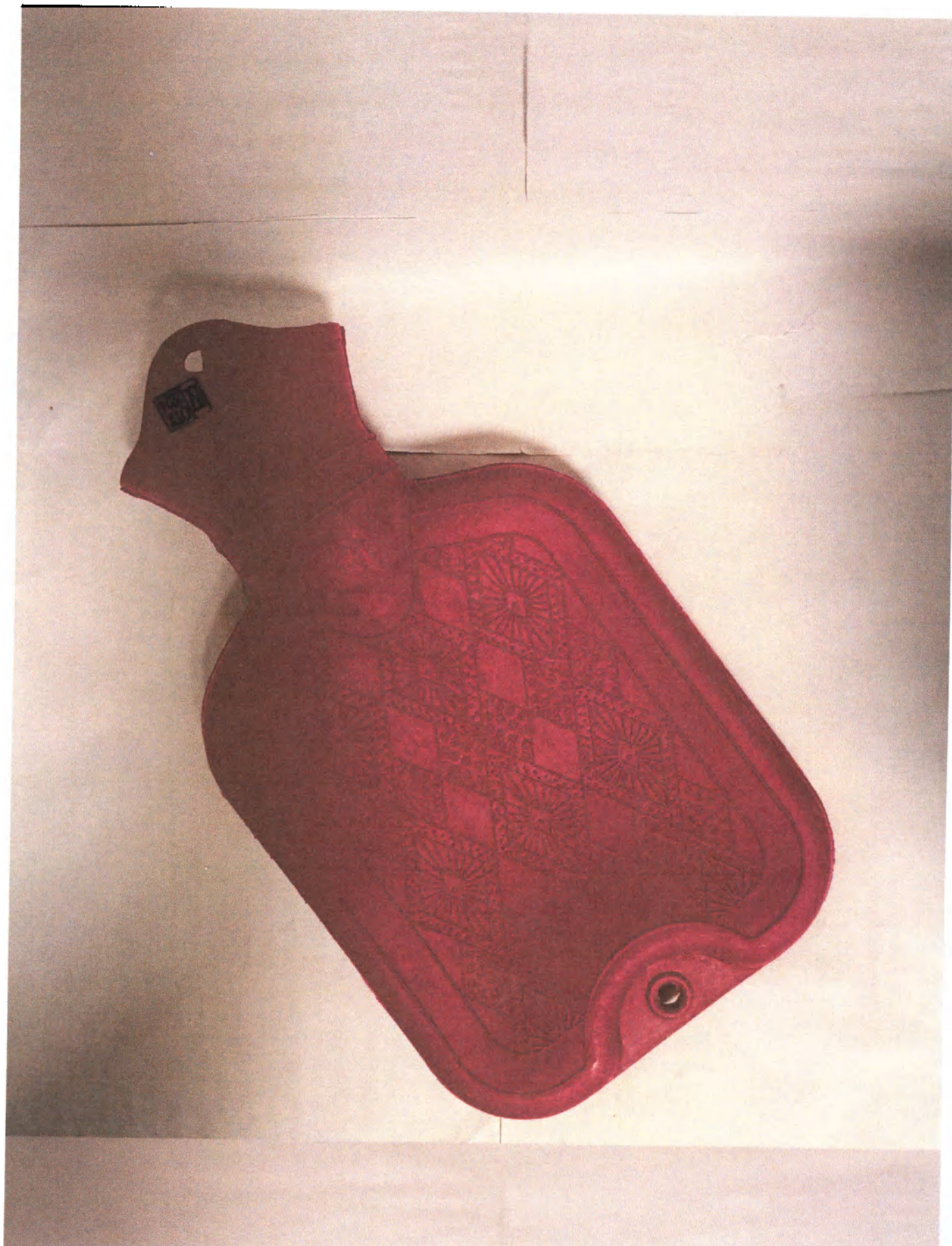


Рисунок 1а.
Грелки резиновые ГР – «Альфа»
по ГОСТ 3303-94 вариант исполнения:
Грелка резиновая ГР – «Альфа» №1 тип А
Общий вид в потребительской упаковке с маркировкой



Грелка резиновая ГР «Альфа» №1 тип А
по ГОСТ 3303-94
1 литр
РУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 г.
Инструкция по эксплуатации

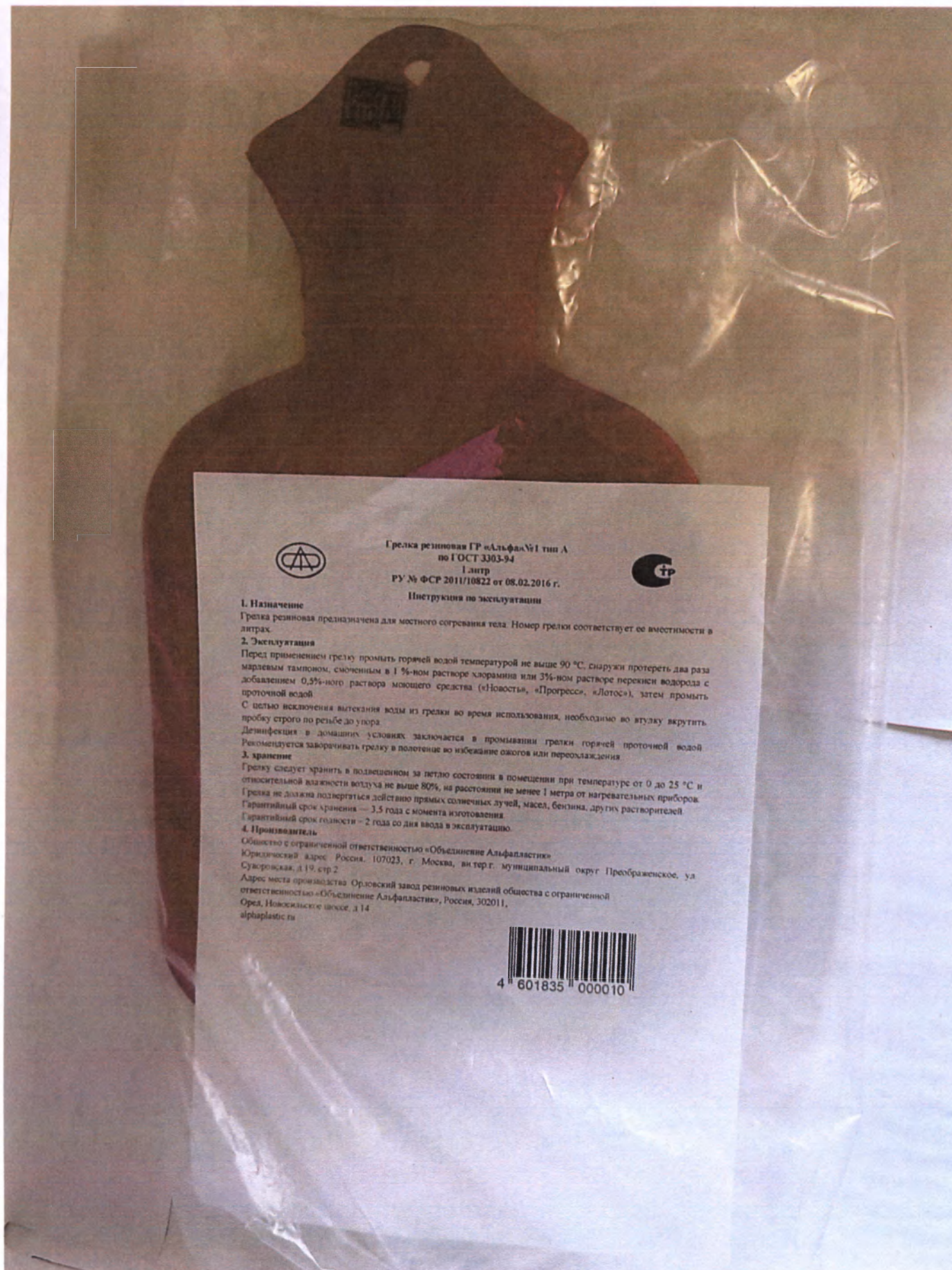

1. Назначение

Грелка резиновая предназначена для местного согревания тела. Номер грелки соответствует ее вместимости в литрах.

2. Эксплуатация

Перед применением грелку промыть горячей водой температурой не выше 90 °С, снаружи протереть два раза марлевым тампоном, смоченным в 1 %-ном растворе хлорамина или 3 %-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5 %-ного раствора моющего средства («Новость», «Прогресс», «Лотос»), затем промыть проточной водой.

С целью исключения вытекания воды из грелки во время использования, необходимо во втулку вкрутить пробку строго по резьбе до упора.

Дезинфекция в домашних условиях заключается в промывании грелки горячей проточной водой. Рекомендуется заворачивать грелку в полотенце во избежание ожогов или переохлаждения.

3. хранение

Грелку следует хранить в подвешенном за петлю состоянии в помещении при температуре от 0 до 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Грелка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, бензина, других растворителей.

Гарантийный срок хранения — 3,5 года с момента изготовления.

Гарантийный срок годности — 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

4. Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик»
Юридический адрес: Россия, 107023, г. Москва, инт.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Суворовская, д.19, стр.2

Адрес места производства: Орловский завод резиновых изделий общества с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик», Россия, 302011, Орел, Новосильское шоссе, д.14

alphaplastic.ru



Рисунок 16.
Грелки резиновые ГР – «Альфа»
по ГОСТ 3303-94 вариант исполнения:
Грелка резиновая ГР – «Альфа» №1 тип А
Общий вид в транспортной упаковке с маркировкой

 Производители: ООО «Общество Автоматизации» Россия, 107023, г. Москва, в/ч. 1481, м/р. 1481 107023, г. Москва, в/ч. 1481, м/р. 1481 Тел.: +7 (495) 59-84-16, +7 (495) 59-84-15	
ГРЕЛКИ РЕЗИНОВЫЕ ГР-«Альфа» №1 тип А ГР-«Альфа» РЕЗИНА ГРЕЛКАРИ А ТУРИ РУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 ТВ/Х 00152/04/15 18.08.2020 по ГОСТ 3303-94	
Количество / Сона:	15 шт. / дон
Вместимость грелки / Грелкариг ситим:	1 Л
Дата изготовления(ка, год) / Чорак ва чидрилган или:	4 KB 24
Гарантийный срок хранения – 3,5 года с момента изготовления / Кафолатли савлаш муддати – илгаб «чидрилган» санадан бошлаб 3,5 йил Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию / Кафолатли фойдаланиш муддати – эксплуатацияга чидрилган кундан бошлаб 2 йил	
Ишлаб чиқарувчи: «Общество Автоматизации» ЗАО, 107023, Москва, в/ч. 1481, м/р. 1481 107023, Москва, в/ч. 1481, м/р. 1481 Тел.: +7 (495) 59-84-16, +7 (495) 59-84-15	
  	 4 601835 000201

Рисунок 2.
Грелки резиновые ГР – «Альфа»
по ГОСТ 3303-94 вариант исполнения:
Грелка резиновая ГР – «Альфа» №2 тип А
Общий вид с маркировкой


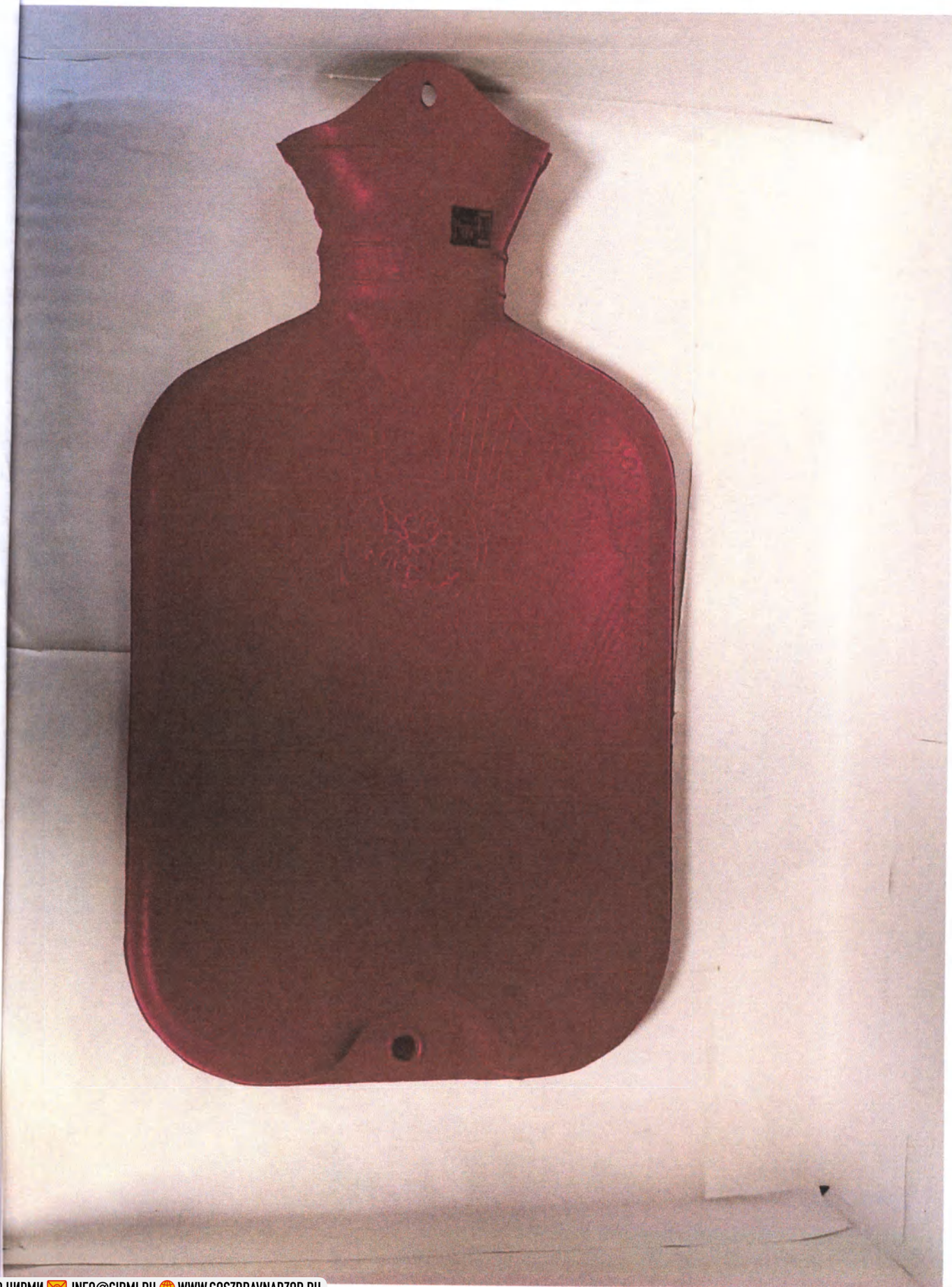


Рисунок 2а.
Грелки резиновые ГР – «Альфа»
по ГОСТ 3303-94 вариант исполнения:
Грелка резиновая ГР – «Альфа» №2 тип А
Общий вид в потребительской упаковке с маркировкой



Грелка резиновая ГР «Альфа» №2 тип А
по ГОСТ 3303-94
2 литра
РУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 г.

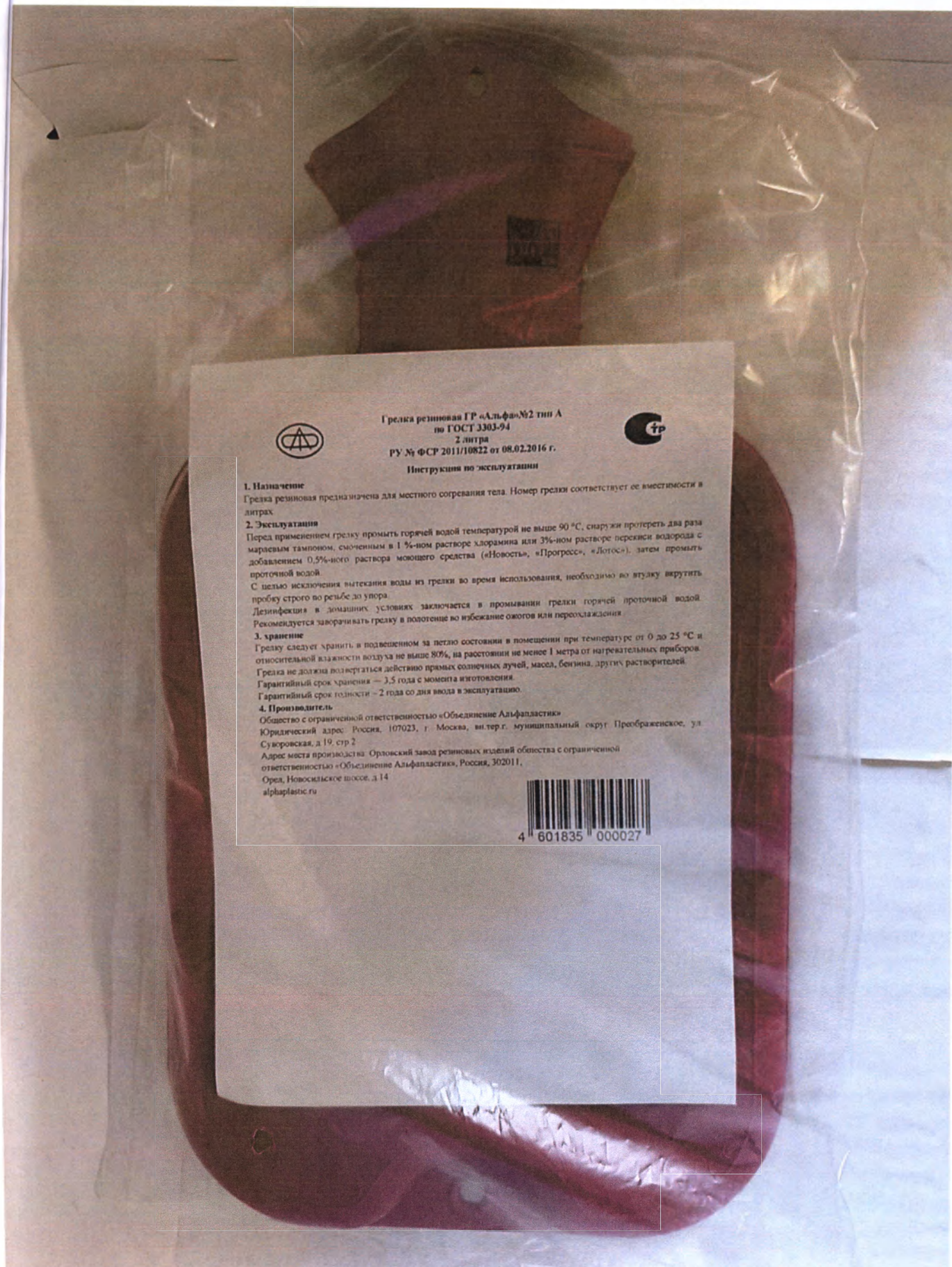

Инструкция по эксплуатации

1. Назначение

Грелка резиновая предназначена для местного согревания тела. Номер грелки соответствует ее вместимости в литрах.

2. Эксплуатация

Перед применением грелку промыть горячей водой температурой не выше 90 °С, снаружи протереть два раза марлевым тампоном, смоченным в 1 %-ном растворе хлорамина или 3 %-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5 %-ного раствора моющего средства («Новость», «Прогресс», «Лотос»), затем промыть проточной водой.

С целью исключения вытекания воды из грелки во время использования, необходимо во внутрь вкрутить пробку строго по резьбе до упора.

Дезинфекция в домашних условиях заключается в промывании грелки горячей проточной водой. Рекомендуется заворачивать грелку в полотенце во избежание ожогов или переохлаждения.

3. хранение

Грелку следует хранить в подвешенном за петлю состоянии в помещении при температуре от 0 до 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Грелка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, бензина, других растворителей. Гарантийный срок хранения — 3,5 года с момента изготовления. Гарантийный срок годности — 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

4. Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик»
Юридический адрес: Россия, 107023, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Суворовская, д.19, стр.2

Адрес места производства: Орловский завод резиновых изделий общества с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик», Россия, 302011, Орел, Новосилское шоссе, д.14
alphaelastic.ru



4 601835 000027

Рисунок 26.
Грелки резиновые ГР – «Альфа»
по ГОСТ 3303-94 вариант исполнения:
Грелка резиновая ГР – «Альфа» №2 тип А
Общий вид в транспортной упаковке с маркировкой

 Производитель: ООО «Общество Альфапластик» Россия, 107023, г. Москва, восточный административный округ Преображенский, ул. Суворовская, д. 18 стр. 2, 302011, г. Орск, Новостройское шоссе, д. 14 Тел.: +7 (4862) 59-64-18, +7 (4862) 59-64-10	
ГРЕЛКИ РЕЗИНОВЫЕ ГР-«Альфа» №2 тип А ГР-«Альфа» РЕЗИНА ГРЕЛКАЛАРИ А ТУРИ РУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 г. ТВ/Х 00152/04/15 18.05.2020 по ГОСТ 3303-94	
Количество / Срок:	10 шт. / дон
Вместимость грелки / Грелкине сими:	2 л
Дата изготовления(кв., год) / Чорак ва чигирилган йил:	4XB24
Гарантийный срок хранения – 3,5 года с момента изготовления / Кафолатли сават муддати – ишлаб чиқарилган саватдан бошлаб 3,5 йил. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию / Кафолатли фойдаланиш муддати – эксплуатацияга чиқарилган кундан бошлаб 2 йил.	
Ишлаб чиқарувчи: «Общество Альфапластик» ООО, 107023, Москва ш.кв. Преображенское ины худудий округ муниципальный округ, Суворовская ул.кв. 18-стр. 2-кв.кв. 302011, Орск ш., Новостройское шоссе, 14-ул. Тел.: +7 (4862) 59-64-18, +7 (4862) 59-64-10	
  	 4 601835 000218

Рисунок 3.
Грелки резиновые ГР – «Альфа»
по ГОСТ 3303-94 вариант исполнения:
Грелка резиновая ГР – «Альфа» №3 тип А
Общий вид с маркировкой


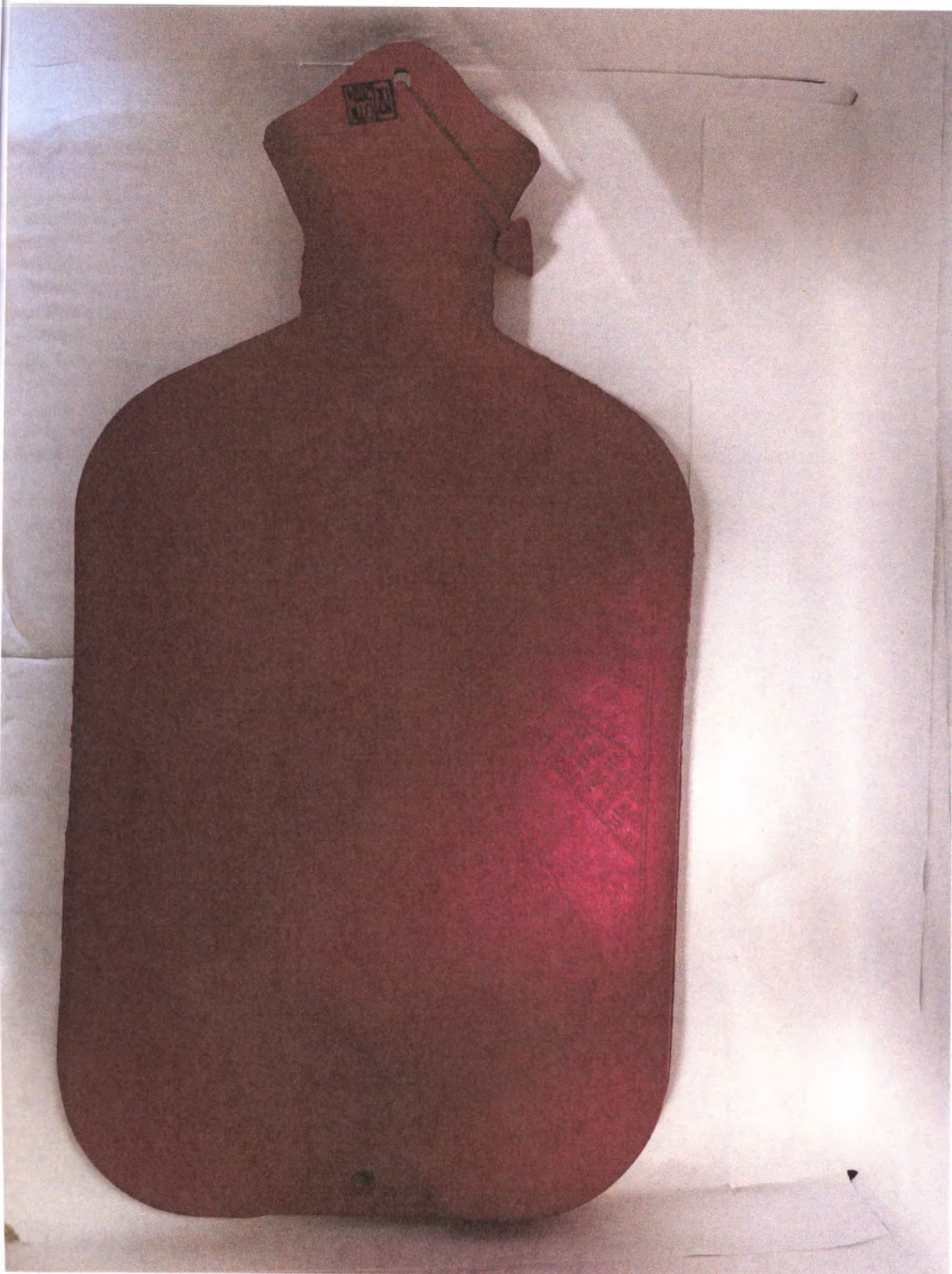


Рисунок 3а.
Грелки резиновые ГР – «Альфа»
по ГОСТ 3303-94 вариант исполнения:
Грелка резиновая ГР – «Альфа» №3 тип А
Общий вид в потребительской упаковке с маркировкой



Грелка резиновая ГР «Альфа» №3 тип А
 по ГОСТ 3303-94
 3 литра
 РУ № ФСТ 2011/10822 от 08.02.2016 г.
 Инструкция по эксплуатации

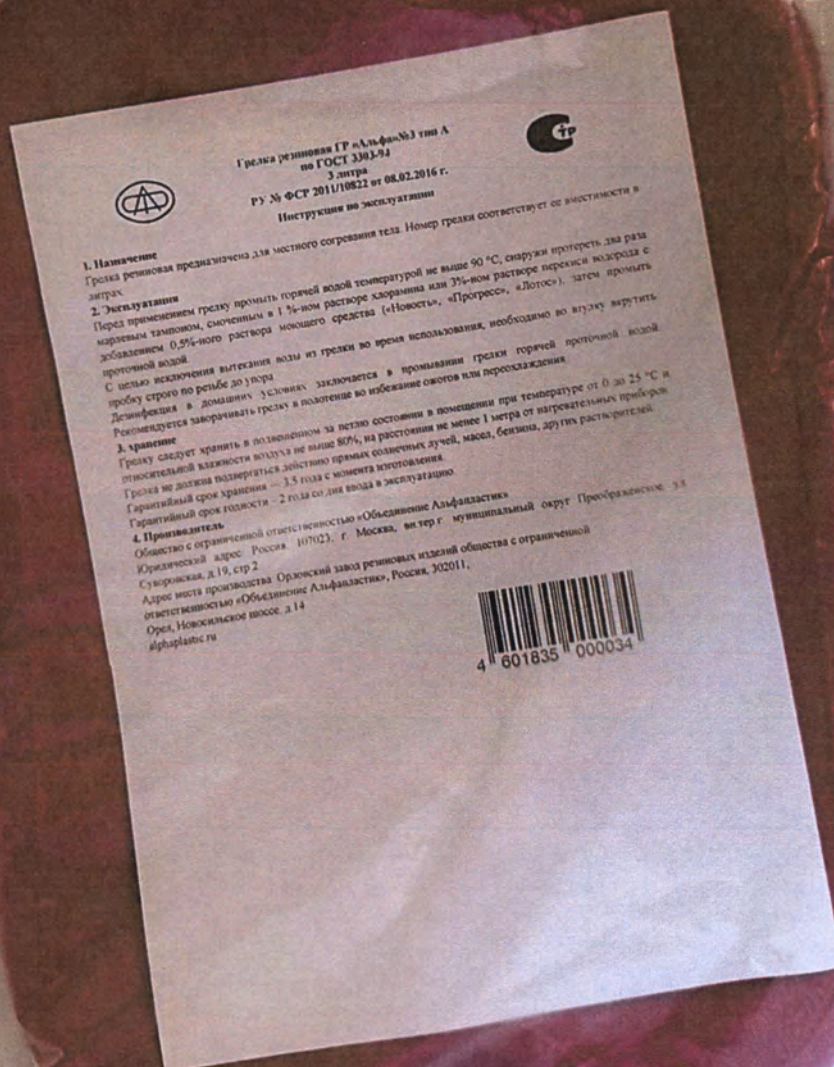

1. Назначение

Грелка резиновая предназначена для местного согревания тела. Номер грелки соответствует ее вместимости в литрах.

2. Эксплуатация

Перед применением грелку промыть горячей водой температурой не выше 90 °С, снаружи протереть два раза марлевым тампоном, смоченным в 1%-ном растворе хлорамина или 3%-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5%-ного раствора моющего средства («Новости», «Прогресс», «Лотос»), затем промыть проточной водой.

С целью исключения вытекания воды из грелки во время использования, необходимо во внутрь вкрутить пробку строго по резьбе до упора.

Дезинфекция в домашних условиях заключается в промывании грелки горячей проточной водой.

3. Хранение

Грелку следует хранить в полиэтиленовом запыленном состоянии в помещении при температуре от 0 до 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Грелка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, бензина, других растворителей.

Гарантийный срок хранения — 3,5 года с момента изготовления.

Гарантийный срок годности — 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

4. Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик»
 Юридический адрес: Россия, 107023, г. Москва, восточный административный округ Преображенское, 33
 Сухаревская, д.19, стр.2
 Адрес места производства: Орловский завод резиновых изделий общества с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик», Россия, 302011,
 Орел, Новосильское шоссе, д.14
 alpha-plastic.ru



Рисунок 3б.
Грелки резиновые ГР – «Альфа»
по ГОСТ 3303-94 вариант исполнения:
Грелка резиновая ГР – «Альфа» №3 тип А
Общий вид в транспортной упаковке с маркировкой

 **Производитель:**
ООО «Объединение Альфапластик»
Россия, 107023, г. Москва, восточный муниципальный
район Преображенское, ул. Суворовская, д. 19, стр. 2,
352011, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 14
Тел.: +7 (4962) 59-84-16, +7 (4962) 59-84-10

**ГРЕЛКИ РЕЗИНОВЫЕ
ГР-«Альфа» №3 тип А**

ГР-«Альфа» РЕЗИНА ГРЕЛКАРИ А ТУРИ
РУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 г.
ТВ/Х 00152/04/15 18.05.2020
по ГОСТ 3303-94

Количество / 10 шт. / дон
Сона:

Вместимость грелки / 3 л
Грелкалинг ситим:

Дата изготовления(кв., год) /
Чорак ва чидарилган йили: 4KB24

Гарантийный срок хранения – 3,5 года с момента изготовления /
Кафолатли саклаш муддати – ишгаб чидарилган санадан бошлаб 3,5 йил.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода
в эксплуатацию / Кафолатли фойдаланиш муддати – эксплуатация
чидарилган санадан бошлаб 2 йил.

Ишгаб чидарилган:
«Объединение Альфапластик» ООО,
107023, Москва шоссе, Преображенское восточный район
муниципальный округ, Суворовское шоссе, 19-й, 2-й этаж,
352011, Орел ш., Новосильское шоссе, 14-й,
Тел.: +7 (4962) 59-84-16, +7 (4962) 59-84-10

4 601835 000225

Рисунок 4.
Грелки резиновые ГР – «Альфа»
по ГОСТ 3303-94 вариант исполнения:
Грелка резиновая ГР – «Альфа» №1 тип Б (комбинированная)
Общий вид с маркировкой

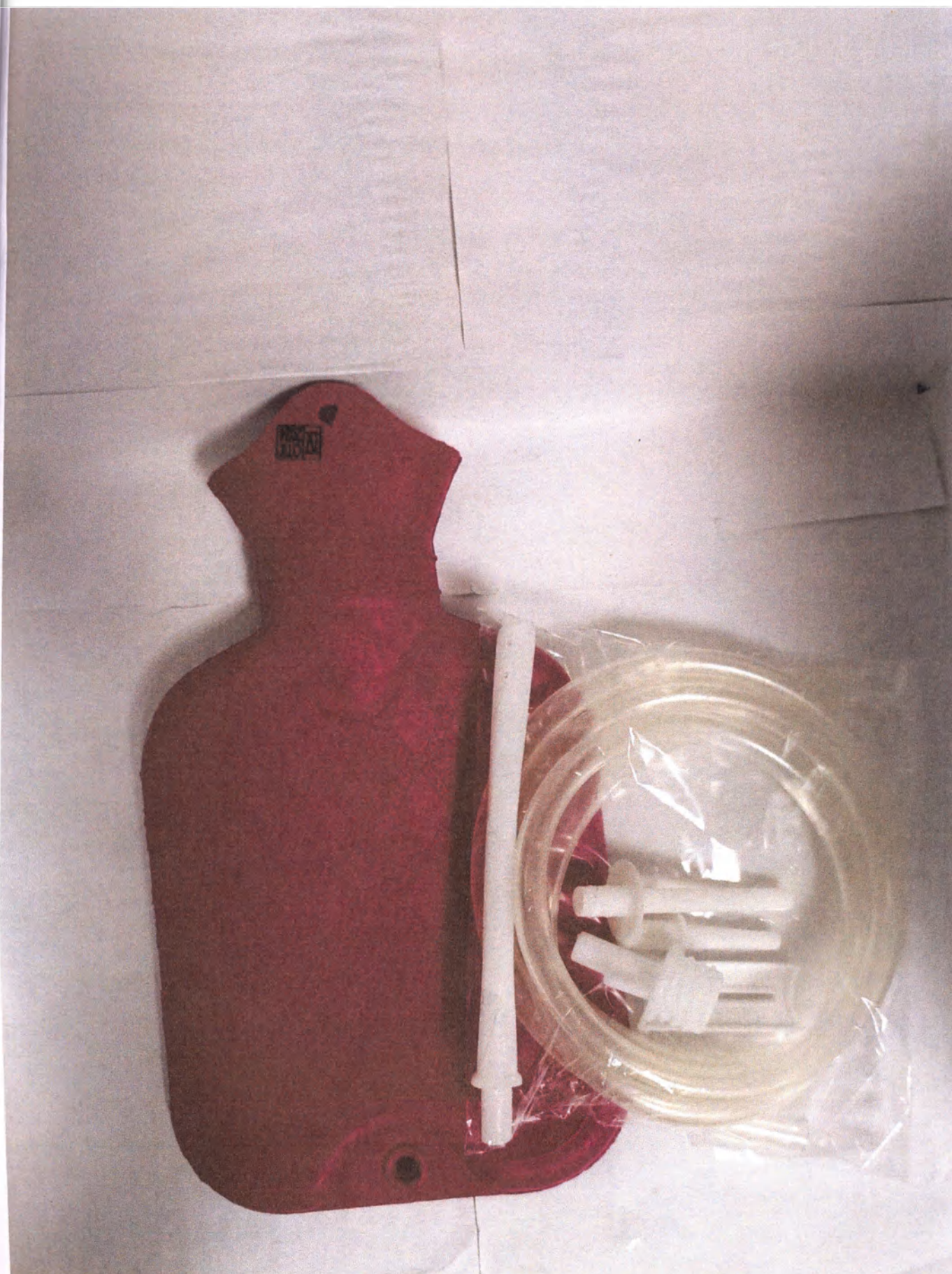


Рисунок 4а.
Грелки резиновые ГР – «Альфа»
по ГОСТ 3303-94 вариант исполнения:
Грелка резиновая ГР – «Альфа» №1 тип Б (комбинированная)
Общий вид в потребительской упаковке с маркировкой



Грелка резиновая ГР «Альфа» №1 тип Б
 (комбинированная)
 по ГОСТ 3303-94
 1 литр
 РУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 г.
 Инструкция по эксплуатации



1. Назначение

Грелка типа Б предназначена для местного согревания тела (грелка с пробкой), промываний и спринцеваний (грелка с комплекующими деталями).

2. Комплектность

1. Грелка в сборе типа А – 1 шт.
2. Винтовой затвор со сквозным отверстием – 1 шт.
3. Наконечники для детей – 1 шт., для взрослых – шт., маточный – 1 шт.
4. Трубка резиновая или ПВХ – 1 шт.
5. Зажим – 1 шт.
6. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

3. Эксплуатация

Перед применением грелку промыть горячей водой температурой не выше 90 °С, снаружи протереть два раза марлевым тампоном, смоченным в 1 %-ном растворе хлорамина или 3%-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5%-ного раствора моющего средства («Новость», «Прогресс», «Лотос»), затем промыть проточной водой. При применении грелки для местного согревания тела во втулку вкрутить пробку. При применении грелки для промывания и спринцевания пробку заменить на винтовой затвор со сквозным отверстием. На трубку надеть зажим.

Трубку одним концом надеть на свободный конец винтового затвора, а другой конец трубки из ПВХ опустить на 1 минуту в горячую воду и надеть на наконечник, обработанный 1%-ным раствором хлорамина в течение 30 минут или 3%-ным раствором перекиси водорода в течение 80 минут и промыть горячей проточной водой. После каждого применения наконечник промывать проточной водой с мылом, ополаскивать. После применения грелку промыть горячей проточной водой и подвесить за петлю. При этом открыты для удаления воды.

Дезинфекция в домашних условиях заключается в промывании грелки горячей проточной водой. Рекомендуется заворачивать грелку в полотенце во избежание ожогов или переохлаждения.

4. хранение

Грелку следует хранить в подвешенном за петлю состоянии в помещении при температуре от 0 до 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Грелка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, бензина, других растворителей. Гарантийный срок хранения – 3,5 года с момента изготовления.

5. Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик»
 Юридический адрес: Россия, 107023, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Суворовская, д.19, стр.2
 Адрес места производства: Орловский завод резиновых изделий общества с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик», Россия, 302011, Орел, Новосильское шоссе, д.14
 alfablastik.ru



Рисунок 46.
Грелки резиновые ГР – «Альфа»
по ГОСТ 3303-94 вариант исполнения:
Грелка резиновая ГР – «Альфа» №1 тип Б (комбинированная)
Общий вид в транспортной упаковке с маркировкой

Производитель:
 ООО «Объединение Альфа-Строй»
 Россия, 107023, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 18, стр. 2
 302011, г. Орел, Новорыбинское шоссе, д. 14
 Тел.: +7 (4862) 59-84-15, +7 (4862) 59-84-10

ГРЕЛКИ РЕЗИНОВЫЕ ГР-«Альфа»
тип Б (комбинированные) №1
 ГР-«Альфа» РЕЗИНА ГРЕЛКАЛАРИ Б турн (машинный)

РУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 г.
 ТВ\Х 0015204/15 18.05.2020
 по ГОСТ 3303-94

Количество / Сона:	10 шт. / донд
Вместимость грелки / Грелкалит сгити:	1 л
Дата изготовления(кв., год) / Чорак ва чидрилган йили:	18

Гарантийный срок хранения – 3,5 года с момента изготовления /
 Карфатли саклаш муддати – нисаб чидрилган санадан бошлаб 3,5 йил.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода
 в эксплуатацию / Карфатли ва фойдаланиш муддати – эксплуатацияга
 кирдрилган кундан бошлаб 2 йил.


Миллаб чидрувиги:
 «Объединение Альфа-Строй» МПСК
 107023, Москва, ул. Мясницкая, д. 18, стр. 2
 муниципалитет Орел, Суворовская улица, 18-й, 2-й этаж
 302011, Орел, г. Новорыбинское шоссе, 14-й
 Тел.: +7 (4862) 59-84-15, +7 (4862) 59-84-10

4 601835 000713

Рисунок 5.
Грелки резиновые ГР – «Альфа»
по ГОСТ 3303-94 вариант исполнения:
Грелка резиновая ГР – «Альфа» №2 тип Б (комбинированная)
Общий вид с маркировкой



Рисунок 5а.
Грелки резиновые ГР – «Альфа»
по ГОСТ 3303-94 вариант исполнения:
Грелка резиновая ГР – «Альфа» №2 тип Б (комбинированная)
Общий вид в потребительской упаковке с маркировкой

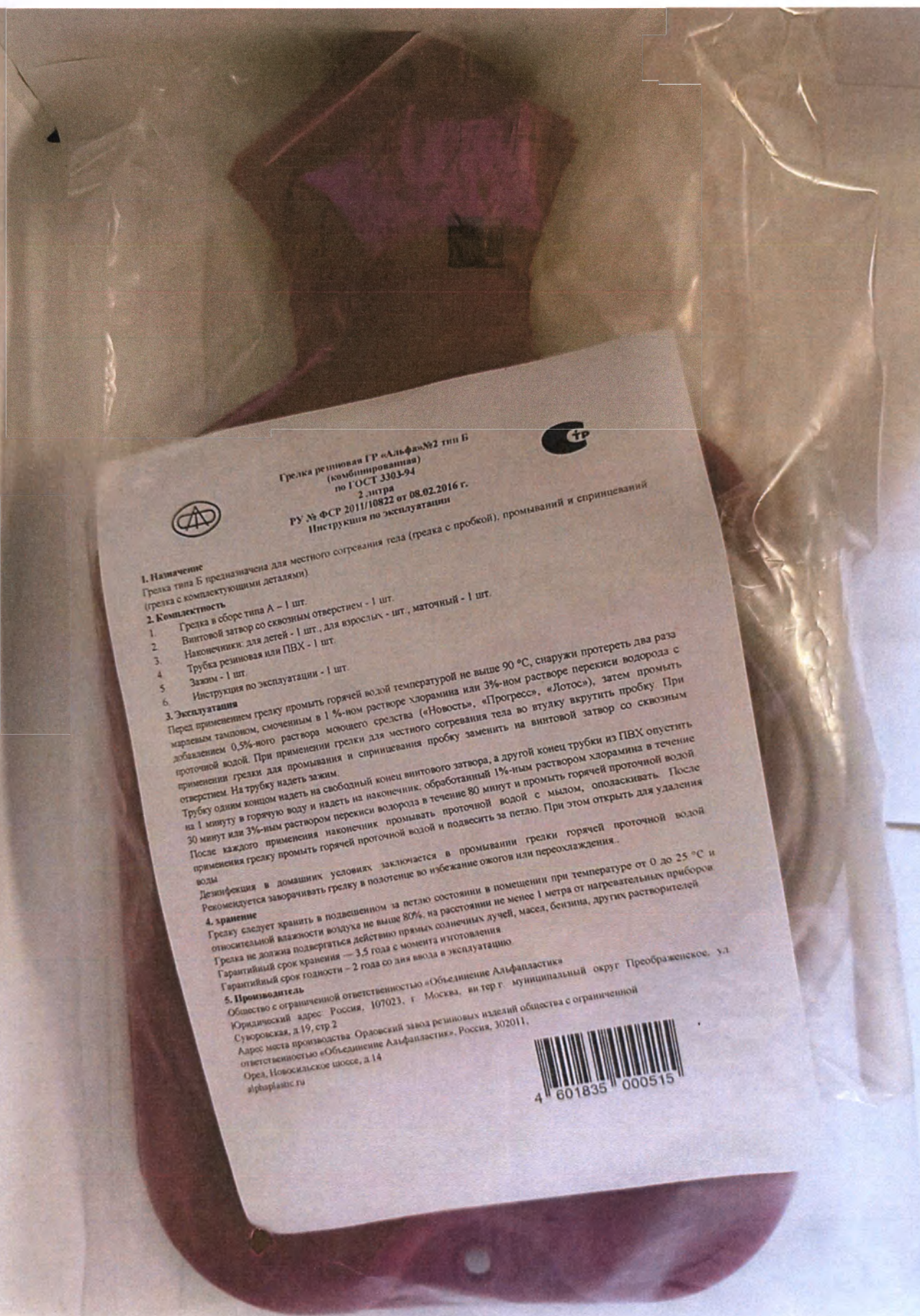

Грелка резиновая ГР «Альфа» №2 тип Б
 (комбинированная)
 по ГОСТ 3303-94
 2 литра
 РУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 г.
 Инструкция по эксплуатации



1. Назначение
 Грелка типа Б предназначена для местного согревания тела (грелка с пробкой), промываний и спринцеваний (грелка с комплектующими деталями).

2. Комплектность

1. Грелка в сборе типа А – 1 шт.
2. Винтовой затвор со сквозным отверстием – 1 шт.
3. Наконечники: для детей – 1 шт., для взрослых – шт., маточный – 1 шт.
4. Трубка резиновая или ПВХ – 1 шт.
5. Зажим – 1 шт.
6. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

3. Эксплуатация

Перед применением грелку промыть горячей водой температурой не выше 90 °С, снаружи протереть два раза марлевым тампоном, смоченным в 1%-ном растворе хлорамина или 3%-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5%-ного раствора моющего средства («Новость», «Прогресс», «Лотос»), затем промыть проточной водой. При применении грелки для местного согревания тела во втулку вкрутить пробку. При применении грелки для промывания и спринцевания пробку заменить на винтовой затвор со сквозным отверстием. На трубку надеть зажим. Трубку одним концом надеть на свободный конец винтового затвора, а другой конец трубки из ПВХ опустить на 1 минуту в горячую воду и надеть на наконечник. обработанный 1%-ным раствором хлорамина в течение 30 минут или 3%-ным раствором перекиси водорода в течение 80 минут и промыть горячей проточной водой. После каждого применения наконечник промывать проточной водой с мылом, ополаскивать. После применения грелку промыть горячей проточной водой и подвесить за петлю. При этом открыть для удаления воды.

Дезинфекция в домашних условиях заключается в промывании грелки горячей проточной водой. Рекомендуется заворачивать грелку в полотенце во избежание ожогов или переохлаждения.

4. хранение

Грелку следует хранить в подвешенном за петлю состоянии в помещении при температуре от 0 до 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Грелка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, бензина, других растворителей. Гарантийный срок хранения – 3,5 года с момента изготовления. Гарантийный срок годности – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

5. Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик»
 Юридический адрес: Россия, 107023, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Суворовская, д.19, стр.2
 Адрес места производства: Ораовский завод резиновых изделий общества с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик», Россия, 302011, Орел, Новосельское шоссе, д.14
 alpha@yandex.ru



Рисунок 5б.
Грелки резиновые ГР – «Альфа»
по ГОСТ 3303-94 вариант исполнения:
Грелка резиновая ГР – «Альфа» №2 тип Б (комбинированная)
Общий вид в транспортной упаковке с маркировкой


 Производитель:
 ООО «Объединение Аграриев России»
 Россия, 197323, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Суворовская, д. 14, стр. 2
 352011, г. Орел, Новозеленский аэродром, д. 3А
 Тел.: +7 (4902) 99-64-16; +7 (4902) 99-64-10

ГРЕЛКИ РЕЗИНОВЫЕ ГР-«Альфа»
тип Б (комбинированные) №2
 (ГР-«Альфа» РЕЗИНА ГРЕЛКАРИ Б турн (межмузей))

РУ № ФСР 2011/10622 от 08.02.2018 г.
 ТВ/Х 0015204/15 18.05.2020
 по ГОСТ 3303-94

Количество /
 Соля: **8 шт. / дна**

Вместимость грелки /
 Грелкинг ситими: **2 Л**

Дата изготовления(кв., год) /
 Чорак ва чикрилан иили: **4XB24**

Гарантийный срок хранения – 3,5 года с момента изготовления /
 Кароплати саччаси муддати – пиллаб чикриланг санкази бошлал 3,5 илг.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода
 в эксплуатацию / Кароплати фондацияни муддати – эксплуатацияга
 чикриланг кундан бошлал 2 илг.

Напалб чикригечи:
 «Объединение Аграриев России» М-ОК,
 197323, Москва, округ Преображенское, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Суворовская д.14, стр. 2-кв.10
 352011, Орел, Новозеленский аэродром, д. 3А
 Тел.: +7 (4902) 99-64-16; +7 (4902) 99-64-10





 4 601835 000720

Рисунок 6.
Грелки резиновые ГР – «Альфа»
по ГОСТ 3303-94 вариант исполнения:
Грелка резиновая ГР – «Альфа» №3 тип Б (комбинированная)
Общий вид с маркировкой


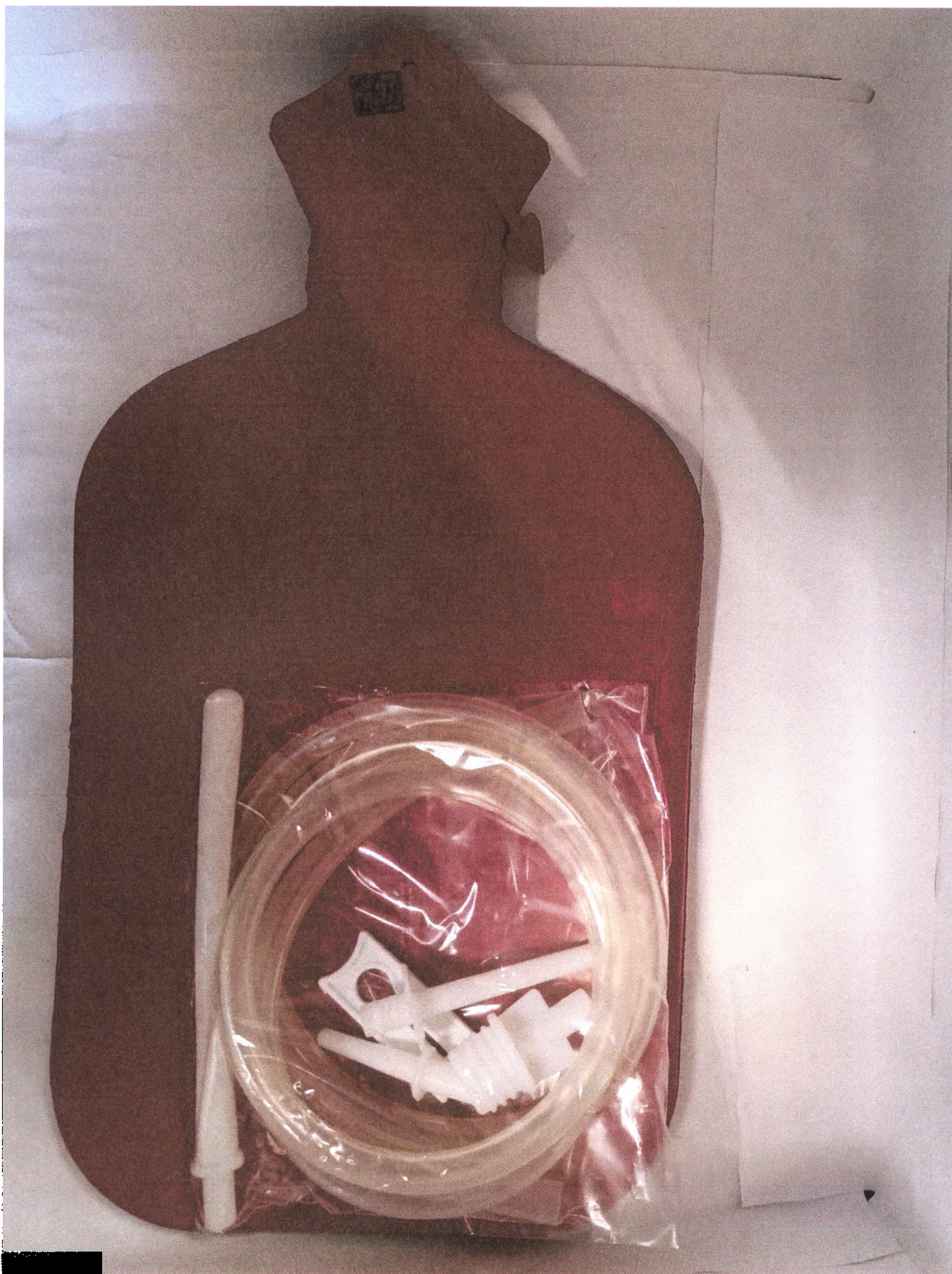


Рисунок 6а.
Грелки резиновые ГР – «Альфа»
по ГОСТ 3303-94 вариант исполнения:
Грелка резиновая ГР – «Альфа» №3 тип Б (комбинированная)
Общий вид в потребительской упаковке с маркировкой



Грелка резиновая ГР «Альфа» №3 тип Б
(комбинированная)
по ГОСТ 3303-94
3 литра
РУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 г.
Инструкция по эксплуатации

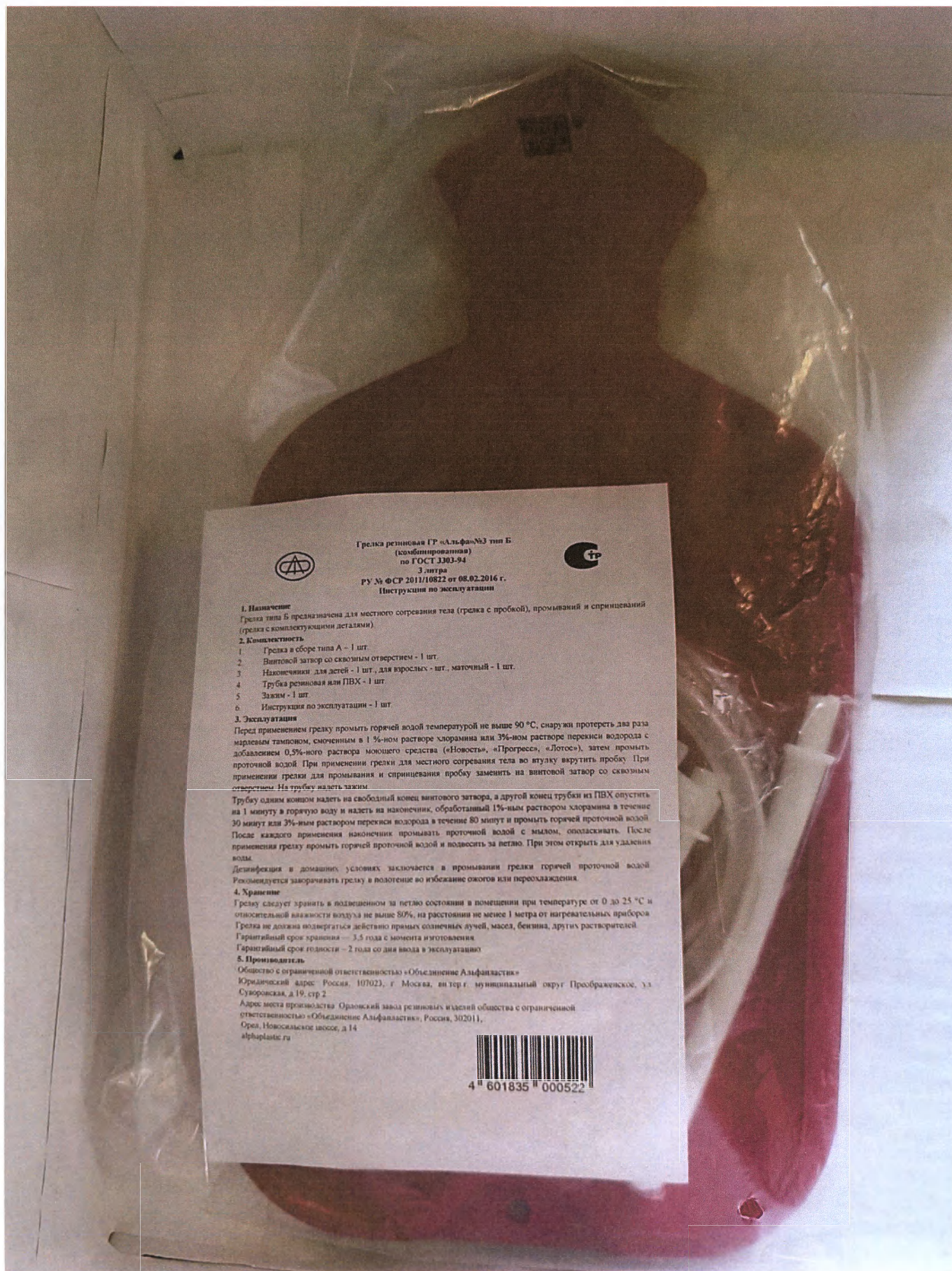

1. Назначение

Грелка типа Б предназначена для местного согревания тела (грелка с пробкой), промываний и спринцеваний (грелка с комплексуемыми деталями).

2. Комплектность

1. Грелка в сборе типа А – 1 шт.
2. Винтовой затвор со сквозным отверстием – 1 шт.
3. Наконечники для детей – 1 шт., для взрослых – шт., маточный – 1 шт.
4. Трубка резиновая или ПВХ – 1 шт.
5. Зажим – 1 шт.
6. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

3. Эксплуатация

Перед применением грелку промыть горячей водой температурой не выше 90 °С, снаружи протереть два раза марлевым тампоном, смоченным в 1 %-ном растворе хлорамин или 3%-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5%-ного раствора моющего средства («Новость», «Прогресс», «Лотос»), затем промыть проточной водой. При применении грелки для местного согревания тела во втулку вкрутить пробку. При применении грелки для промывания и спринцевания пробку заменить на винтовой затвор со сквозным отверстием. На трубку надеть зажим.

Трубку одним концом надеть на свободный конец винтового затвора, а другой конец трубки из ПВХ опустить на 1 минуту в горячую воду и надеть на наконечник, обработанный 1%-ным раствором хлорамин в течение 30 минут или 3%-ным раствором перекиси водорода в течение 80 минут и промыть горячей проточной водой. После каждого применения наконечник промывать проточной водой с мылом, ополаскивать. После применения грелку промыть горячей проточной водой и повесить за петлю. При этом открыть для удаления воды.

Дезинфекция в домашних условиях заключается в промывании грелки горячей проточной водой. Рекомендуется заворачивать грелку в полотенце во избежание ожогов или переохлаждения.

4. Хранение

Грелку следует хранить в подвешенном за петлю состоянии в помещении при температуре от 0 до 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Грелка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, бензина, других растворителей.

Гарантийный срок хранения – 3,5 года с момента изготовления.
Гарантийный срок годности – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

5. Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик»
Юридический адрес: Россия, 107023, г. Москва, восточный муниципальный округ Преображенское, ул. Суворовская, д.19, стр.2.

Адрес места производства: Орловский завод резиновых изделий общества с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик», Россия, 302011,
Орел, Новосельское шоссе, д.14
alpha-plastic.ru



4 601835 000522

 Производитель: ООО «Общественное АЛФАБЛАСТРОЕНИЕ» Россия, 125023, г. Москва, в/п/п г. Муниципальный уезд Гребенский, ул. Савельева, д. 19, стр. 2 350711, С/м. Новосибирская область, д. 14 Тел.: +7 (495) 59-84-15, +7 (495) 59-84-10	
ГРЕЛКИ РЕЗИНОВЫЕ ГР-«Альфа» тип Б (комбинированные) №3	
ГР-«Альфа» РЕЗИНА ГРЕПКАРА Б тури (мажущая)	
РУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 г. ТВХ 00152/04/15 18.05.2020 по ГОСТ 3303-94	
Количество / Сорт:	8 шт. / дон
Вместимость грелки / Грелка/шт. дон	3 л
Дата изготовления (кв., год) / Морав в чирлиган йеки	4X82
Гарантийный срок хранения – 3,5 года с момента изготовления / Карелити савлы мударти – ишоб чирлиган павдан бошоб 3,5 йил.	
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию / Карелити фондация мударти – эксплуатация чирлиган мударти бошоб 2 йил.	
Ишоб чирлиган «Общественное АЛФАБЛАСТРОЕНИЕ» 125023, Москва, в/п/п Гребенский уезд, Савельева ул., д. 19, стр. 2 350711, С/м. Новосибирская область, д. 14 Тел.: +7 (495) 59-84-15, +7 (495) 59-84-10	
	 
4 601835 000737	

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

13 (тринадцать)

листов

Генеральный директор ООО
«Объединение Альфапластик»
С.Н. Мусатов
«5» октября 2024г.





**Грелка резиновая ГР «Альфа» №3 тип Б
(комбинированная)
по ГОСТ 3303-94
3 литра**



**РУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 г.
Инструкция по эксплуатации**

1. Назначение

Грелка типа Б предназначена для местного согревания тела (грелка с пробкой), промываний и спринцеваний (грелка с комплектующими деталями).

2. Комплектность

1. Грелка в сборе типа А – 1 шт.
2. Винтовой затвор со сквозным отверстием - 1 шт.
3. Наконечники: для детей - 1 шт., для взрослых - шт., маточный - 1 шт.
4. Трубка резиновая или ПВХ - 1 шт.
5. Зажим - 1 шт.
6. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

3. Эксплуатация

Перед применением грелку промыть горячей водой температурой не выше 90 °С, снаружи протереть два раза марлевым тампоном, смоченным в 1 %-ном растворе хлорамина или 3%-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5%-ного раствора моющего средства («Новость», «Прогресс», «Лотос»), затем промыть проточной водой. При применении грелки для местного согревания тела во втулку вкрутить пробку. При применении грелки для промывания и спринцевания пробку заменить на винтовой затвор со сквозным отверстием. На трубку надеть зажим.

Трубку одним концом надеть на свободный конец винтового затвора, а другой конец трубки из ПВХ опустить на 1 минуту в горячую воду и надеть на наконечник, обработанный 1%-ным раствором хлорамина в течение 30 минут или 3%-ным раствором перекиси водорода в течение 80 минут и промыть горячей проточной водой. После каждого применения наконечник промывать проточной водой с мылом, ополаскивать. После применения грелку промыть горячей проточной водой и повесить за петлю. При этом открыть для удаления воды.

Дезинфекция в домашних условиях заключается в промывании грелки горячей проточной водой. Рекомендуется заворачивать грелку в полотенце во избежание ожогов или переохлаждения.

4. Хранение

Грелку следует хранить в подвешенном за петлю состоянии в помещении при температуре от 0 до 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

Грелка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, бензина, других растворителей.

Гарантийный срок хранения — 3,5 года с момента изготовления.

Гарантийный срок годности – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

5. Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик»

Юридический адрес: Россия, 107023, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Суворовская, д.19, стр.2

Адрес места производства: Орловский завод резиновых изделий общества с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик», Россия, 302011,

Орел. Новосильское шоссе, д.14

alphaplastic.ru





**Грелка резиновая ГР «Альфа» №2 тип Б
(комбинированная)
по ГОСТ 3303-94**

2 литра

РУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 г.

Инструкция по эксплуатации



1. Назначение

Грелка типа Б предназначена для местного согревания тела (грелка с пробкой), промываний и спринцеваний (грелка с комплектующими деталями).

2. Комплектность

1. Грелка в сборе типа А – 1 шт.
2. Винтовой затвор со сквозным отверстием - 1 шт.
3. Наконечники: для детей - 1 шт., для взрослых - шт., маточный - 1 шт.
4. Трубка резиновая или ПВХ - 1 шт.
5. Зажим - 1 шт.
6. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

3. Эксплуатация

Перед применением грелку промыть горячей водой температурой не выше 90 °С, снаружи протереть два раза марлевым тампоном, смоченным в 1 %-ном растворе хлорамина или 3%-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5%-ного раствора моющего средства («Новость», «Прогресс», «Лотос»), затем промыть проточной водой. При применении грелки для местного согревания тела во втулку вкрутить пробку. При применении грелки для промывания и спринцевания пробку заменить на винтовой затвор со сквозным отверстием. На трубку надеть зажим.

Трубку одним концом надеть на свободный конец винтового затвора, а другой конец трубки из ПВХ опустить на 1 минуту в горячую воду и надеть на наконечник, обработанный 1%-ным раствором хлорамина в течение 30 минут или 3%-ным раствором перекиси водорода в течение 80 минут и промыть горячей проточной водой. После каждого применения наконечник промывать проточной водой с мылом, ополаскивать. После применения грелку промыть горячей проточной водой и повесить за петлю. При этом открыть для удаления воды.

Дезинфекция в домашних условиях заключается в промывании грелки горячей проточной водой. Рекомендуется заворачивать грелку в полотенце во избежание ожогов или переохлаждения..

4. хранение

Грелку следует хранить в подвешенном за петлю состоянии в помещении при температуре от 0 до 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

Грелка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, бензина, других растворителей.

Гарантийный срок хранения — 3,5 года с момента изготовления.

Гарантийный срок годности – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

5. Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик»

Юридический адрес: Россия, 107023, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Суворовская, д.19, стр.2

Адрес места производства: Орловский завод резиновых изделий общества с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик», Россия, 302011,

Орел, Новосильское шоссе, д.14

alphaplastic.ru





Грелка резиновая ГР «Альфа» №1 тип Б
(комбинированная)
по ГОСТ 3303-94
1 литр



РУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 г.
Инструкция по эксплуатации

1. Назначение

Грелка типа Б предназначена для местного согревания тела (грелка с пробкой), промываний и спринцеваний (грелка с комплектующими деталями).

2. Комплектность

1. Грелка в сборе типа А – 1 шт.
2. Винтовой затвор со сквозным отверстием - 1 шт.
3. Наконечники: для детей - 1 шт., для взрослых - шт., маточный - 1 шт.
4. Трубка резиновая или ПВХ - 1 шт.
5. Зажим - 1 шт.
6. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

3. Эксплуатация

Перед применением грелку промыть горячей водой температурой не выше 90 °С, снаружи протереть два раза марлевым тампоном, смоченным в 1 %-ном растворе хлорамина или 3%-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5%-ного раствора моющего средства («Новость», «Прогресс», «Лотос»), затем промыть проточной водой. При применении грелки для местного согревания тела во втулку вкрутить пробку. При применении грелки для промывания и спринцевания пробку заменить на винтовой затвор со сквозным отверстием. На трубку надеть зажим.

Трубку одним концом надеть на свободный конец винтового затвора, а другой конец трубки из ПВХ опустить на 1 минуту в горячую воду и надеть на наконечник, обработанный 1%-ным раствором хлорамина в течение 30 минут или 3%-ным раствором перекиси водорода в течение 80 минут и промыть горячей проточной водой. После каждого применения наконечник промывать проточной водой с мылом, ополаскивать. После применения грелку промыть горячей проточной водой и повесить за петлю. При этом открыть для удаления воды.

Дезинфекция в домашних условиях заключается в промывании грелки горячей проточной водой. Рекомендуется заворачивать грелку в полотенце во избежание ожогов или переохлаждения..

4. хранение

Грелку следует хранить в подвешенном за петлю состоянии в помещении при температуре от 0 до 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

Грелка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, бензина, других растворителей.

Гарантийный срок хранения — 3,5 года с момента изготовления.

Гарантийный срок годности – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

5. Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик»

Юридический адрес: Россия, 107023, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Суворовская, д.19, стр.2

Адрес места производства: Орловский завод резиновых изделий общества с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик», Россия, 302011,

Орел, Новосильское шоссе, д.14

alphaplastic.ru





Грелка резиновая ГР «Альфа» №3 тип А
по ГОСТ 3303-94

3 литра

РУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 г.



Инструкция по эксплуатации

1. Назначение

Грелка резиновая предназначена для местного согревания тела. Номер грелки соответствует ее вместимости в литрах.

2. Эксплуатация

Перед применением грелку промыть горячей водой температурой не выше 90 °С, снаружи протереть два раза марлевым тампоном, смоченным в 1 %-ном растворе хлорамина или 3%-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5%-ного раствора моющего средства («Новость», «Прогресс», «Лотос»), затем промыть проточной водой.

С целью исключения вытекания воды из грелки во время использования, необходимо во втулку вкрутить пробку строго по резьбе до упора.

Дезинфекция в домашних условиях заключается в промывании грелки горячей проточной водой. Рекомендуется заворачивать грелку в полотенце во избежание ожогов или переохлаждения..

3. хранение

Грелку следует хранить в подвешенном за петлю состоянии в помещении при температуре от 0 до 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

Грелка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, бензина, других растворителей.

Гарантийный срок хранения — 3,5 года с момента изготовления.

Гарантийный срок годности – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

4. Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик»

Юридический адрес: Россия, 107023, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Суворовская, д.19, стр.2

Адрес места производства: Орловский завод резиновых изделий общества с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик», Россия, 302011,

Орел, Новосильское шоссе, д.14

alphaplastic.ru





Грелка резиновая ГР «Альфа» №2 тип А
по ГОСТ 3303-94

2 литра

РУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 г.



Инструкция по эксплуатации

1. Назначение

Грелка резиновая предназначена для местного согревания тела. Номер грелки соответствует ее вместимости в литрах.

2. Эксплуатация

Перед применением грелку промыть горячей водой температурой не выше 90 °С, снаружи протереть два раза марлевым тампоном, смоченным в 1 %-ном растворе хлорамина или 3%-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5%-ного раствора моющего средства («Новость», «Прогресс», «Лотос»), затем промыть проточной водой.

С целью исключения вытекания воды из грелки во время использования, необходимо во втулку вкрутить пробку строго по резьбе до упора.

Дезинфекция в домашних условиях заключается в промывании грелки горячей проточной водой. Рекомендуются заворачивать грелку в полотенце во избежание ожогов или переохлаждения..

3. хранение

Грелку следует хранить в подвешенном за петлю состоянии в помещении при температуре от 0 до 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Грелка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, бензина, других растворителей.

Гарантийный срок хранения — 3,5 года с момента изготовления.

Гарантийный срок годности – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

4. Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик»

Юридический адрес: Россия, 107023, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Суворовская, д.19, стр.2

Адрес места производства: Орловский завод резиновых изделий общества с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик», Россия, 302011,

Орел, Новосильское шоссе, д.14

alphaplastic.ru





**Грелка резиновая ГР «Альфа» №1 тип А
по ГОСТ 3303-94**

1 литр

РУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 г.



Инструкция по эксплуатации

1. Назначение

Грелка резиновая предназначена для местного согревания тела. Номер грелки соответствует ее вместимости в литрах.

2. Эксплуатация

Перед применением грелку промыть горячей водой температурой не выше 90 °С, снаружи протереть два раза марлевым тампоном, смоченным в 1 %-ном растворе хлорамина или 3%-ном растворе перекиси водорода с добавлением 0,5%-ного раствора моющего средства («Новость», «Прогресс», «Лотос»), затем промыть проточной водой.

С целью исключения вытекания воды из грелки во время использования, необходимо во втулку вкрутить пробку строго по резьбе до упора.

Дезинфекция в домашних условиях заключается в промывании грелки горячей проточной водой. Рекомендуется заворачивать грелку в полотенце во избежание ожогов или переохлаждения..

3. хранение

Грелку следует хранить в подвешенном за петлю состоянии в помещении при температуре от 0 до 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

Грелка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, бензина, других растворителей.

Гарантийный срок хранения — 3,5 года с момента изготовления.

Гарантийный срок годности – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

4. Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик»

Юридический адрес: Россия, 107023, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Суворовская, д.19, стр.2

Адрес места производства: Орловский завод резиновых изделий общества с ограниченной ответственностью «Объединение Альфапластик», Россия, 302011,

Орел, Новосильское шоссе, д.14

alphaplastic.ru





Производитель:
ООО «Объединение Альфаэластики»
Россия, 107023, г. Москва, в/п.тер.с. муниципальный
округ Преображенское, ул. Суворовская, д. 19, стр. 2.
302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 14
Тел.: +7 (4862) 59-64-16, +7 (4862) 59-64-10

ГРЕЛКИ РЕЗИНОВЫЕ ГР-«Альфа» №1 тип А

ГР-«Альфа» РЕЗИНА ГРЕЛКАЛАРИ А ТУРИ

ПУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 г.
ТВ/Х 00152/04/15 18.05.2020
по ГОСТ 3303-94

Количество /
Сона: **15 шт. / дона**

Вместимость грелки /
Грелканинг ситими: **1 л**

Дата изготовления(кв., год) /
Чорак ва чикрилган йили:

Гарантийный срок хранения – 3,5 года с момента изготовления /
Кафолатли саqlаш муддати – ишлаб чиқарилган санадан бошлаб 3,5 йил.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода
в эксплуатацию / Кафолатли фойдаланиш муддати – эксплуатацияга
чиқарилган кундан бошлаб 2 йил.

Ишлаб чиқарувчи:
«Объединение Альфаэластики» М-ОК,
107023, Москва ш.тер. Преображенское и/или худудий шаҳар
муниципал округи, Суворовская к/часк. 19-й, 2-кварт.
302011, Орел ш., Новосильское шоссе, д. 14-й.
Тел.: +7 (4862) 59-64-16, +7 (4862) 59-64-10



4 601835 000201



Производитель:
ООО «Объединение Альфаэластики»
Россия, 107023, г. Москва, в/п.тер.с. муниципальный
округ Преображенское, ул. Суворовская, д. 19, стр. 2.
302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 14
Тел.: +7 (4862) 59-64-16, +7 (4862) 59-64-10

ГРЕЛКИ РЕЗИНОВЫЕ ГР-«Альфа» №2 тип А

ГР-«Альфа» РЕЗИНА ГРЕЛКАЛАРИ А ТУРИ

ПУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 г.
ТВ/Х 00152/04/15 18.05.2020
по ГОСТ 3303-94

Количество /
Сона: **10 шт. / дона**

Вместимость грелки /
Грелканинг ситими: **2 л**

Дата изготовления(кв., год) /
Чорак ва чикрилган йили:

Гарантийный срок хранения – 3,5 года с момента изготовления /
Кафолатли саqlаш муддати – ишлаб чиқарилган санадан бошлаб 3,5 йил.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода
в эксплуатацию / Кафолатли фойдаланиш муддати – эксплуатацияга
чиқарилган кундан бошлаб 2 йил.

Ишлаб чиқарувчи:
«Объединение Альфаэластики» М-ОК,
107023, Москва ш.тер. Преображенское и/или худудий шаҳар
муниципал округи, Суворовская к/часк. 19-й, 2-кварт.
302011, Орел ш., Новосильское шоссе, д. 14-й.
Тел.: +7 (4862) 59-64-16, +7 (4862) 59-64-10



4 601835 000218



Производитель:
ООО «Объединение Альфаэластики»
Россия, 107023, г. Москва, в/п.тер.с. муниципальный
округ Преображенское, ул. Суворовская, д. 19, стр. 2.
302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 14
Тел.: +7 (4862) 59-64-16, +7 (4862) 59-64-10

ГРЕЛКИ РЕЗИНОВЫЕ ГР-«Альфа» №3 тип А

ГР-«Альфа» РЕЗИНА ГРЕЛКАЛАРИ А ТУРИ

ПУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 г.
ТВ/Х 00152/04/15 18.05.2020
по ГОСТ 3303-94

Количество /
Сона: **10 шт. / дона**

Вместимость грелки /
Грелканинг ситими: **3 л**

Дата изготовления(кв., год) /
Чорак ва чикрилган йили:

Гарантийный срок хранения – 3,5 года с момента изготовления /
Кафолатли саqlаш муддати – ишлаб чиқарилган санадан бошлаб 3,5 йил.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода
в эксплуатацию / Кафолатли фойдаланиш муддати – эксплуатацияга
чиқарилган кундан бошлаб 2 йил.

Ишлаб чиқарувчи:
«Объединение Альфаэластики» М-ОК,
107023, Москва ш.тер. Преображенское и/или худудий шаҳар
муниципал округи, Суворовская к/часк. 19-й, 2-кварт.
302011, Орел ш., Новосильское шоссе, д. 14-й.
Тел.: +7 (4862) 59-64-16, +7 (4862) 59-64-10



4 601835 000225



Производитель:
ООО «Объединение Альфаэластики»
Россия, 107023, г. Москва, в/п.тер.с. муниципальный
округ Преображенское, ул. Суворовская, д. 19, стр. 2.
302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 14
Тел.: +7 (4862) 59-64-16, +7 (4862) 59-64-10

ГРЕЛКИ РЕЗИНОВЫЕ ГР-«Альфа» тип Б (комбинированные) №1

ГР-«Альфа» РЕЗИНА ГРЕЛКАЛАРИ Б тури (мажмууви)

ПУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 г.
ТВ/Х 00152/04/15 18.05.2020
по ГОСТ 3303-94

Количество /
Сона: **10 шт. / дона**

Вместимость грелки /
Грелканинг ситими: **1 л**

Дата изготовления(кв., год) /
Чорак ва чикрилган йили:

Гарантийный срок хранения – 3,5 года с момента изготовления /
Кафолатли саqlаш муддати – ишлаб чиқарилган санадан бошлаб 3,5 йил.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода
в эксплуатацию / Кафолатли фойдаланиш муддати – эксплуатацияга
чиқарилган кундан бошлаб 2 йил.

Ишлаб чиқарувчи:
«Объединение Альфаэластики» М-ОК,
107023, Москва ш.тер. Преображенское и/или худудий шаҳар
муниципал округи, Суворовская к/часк. 19-й, 2-кварт.
302011, Орел ш., Новосильское шоссе, д. 14-й.
Тел.: +7 (4862) 59-64-16, +7 (4862) 59-64-10



4 601835 000713



Производитель:
ООО «Объединение Альфапластик»
Россия, 107023, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Преображенское, ул. Суворовская, д. 19, стр. 2,
302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 14
Тел.: +7 (4862) 59-84-16, +7 (4862) 59-84-10

ГРЕЛКИ РЕЗИНОВЫЕ ГР-«Альфа» тип Б (комбинированные) №2

ГР-«Альфа» РЕЗИНА ГРЕЛКАЛАРИ Б тури (мажмуавий)

РУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 г.

ТВ/Х 00152/04/15 18.05.2020

по ГОСТ 3303-94

Количество /
Сона:

8 шт. / дона

Вместимость грелки /
Грелканинг сифими:

2 Л

Дата изготовления(кв., год) /
Чорак ва чиқарилган йили:

Гарантийный срок хранения – 3,5 года с момента изготовления /
Кафолатли сақлаш муддати – ишлаб чиқарилган санадан бошлаб 3,5 йил.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода
в эксплуатацию / Кафолатли фойдаланиш муддати – эксплуатацияга
чиқарилган кундан бошлаб 2 йил.

Ишлаб чиқарувчи:

«Объединение Альфапластик» МЧЖ,
107023, Москва шаҳри, Преображенское ички худудий шаҳар
муниципал округи, Суворовская кўчаси, 19-уй, 2-иморат,
302011, Орел ш., Новосильское шоссе, 14-уй,
Тел.: +7 (4862) 59-84-16, +7 (4862) 59-84-10



4 601835 000720



Производитель:
ООО «Объединение Альфапластик»
Россия, 107023, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Преображенское, ул. Суворовская, д. 19, стр. 2,
302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 14
Тел.: +7 (4862) 59-84-16, +7 (4862) 59-84-10

ГРЕЛКИ РЕЗИНОВЫЕ ГР-«Альфа» тип Б (комбинированные) №3

ГР-«Альфа» РЕЗИНА ГРЕЛКАЛАРИ Б тури (мажмуавий)

РУ № ФСР 2011/10822 от 08.02.2016 г.

ТВ/Х 00152/04/15 18.05.2020

по ГОСТ 3303-94

Количество /
Сона:

8 шт. / дона

Вместимость грелки /
Грелканинг сифими:

3 Л

Дата изготовления(кв., год) /
Чорак ва чиқарилган йили:

Гарантийный срок хранения – 3,5 года с момента изготовления /
Кафолатли сақлаш муддати – ишлаб чиқарилган санадан бошлаб 3,5 йил.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода
в эксплуатацию / Кафолатли фойдаланиш муддати – эксплуатацияга
чиқарилган кундан бошлаб 2 йил.

Ишлаб чиқарувчи:

«Объединение Альфапластик» МЧЖ,
107023, Москва шаҳри, Преображенское ички худудий шаҳар
муниципал округи, Суворовская кўчаси, 19-уй, 2-иморат,
302011, Орел ш., Новосильское шоссе, 14-уй,
Тел.: +7 (4862) 59-84-16, +7 (4862) 59-84-10



4 601835 000737

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

8 (восемь)

____ листов

Директор ОЗРИ ООО
«Объединение Альфапластик»
С.Н. Мусатов

17 Октября 2024г.

