

Сопроводительное письмо

Мы, OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN, производитель медицинского изделия: Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON: M2 Basic (HEM-7121-ALRU), M2 Basic (HEM-7121-RU), M2 Basic (HEM-7121-ARU), M2 Classic (HEM-7122-ALRU), M2 Classic (HEM-7122-LRU), M3 Eco (HEM-7131-ARU), M3 Expert (HEM-7132-ALRU), M3 Family (HEM-7133-ALRU), с принадлежностями, направляем макет маркировки и упаковки. А так же настоящим просим вас принять информацию о том, что упаковка медицинского изделия может содержать различную маркетинговую и рекламную информацию, и мы гарантируем, что эта информация не содержит данных о медицинском изделии, его назначении, условиях хранения, порядке использования (включая показания и противопоказания), параметрах, характеристиках и т.д. Макет маркетинговой и рекламной информации с описанием и пояснением к нему, прилагается. Место, где маркетинговая и рекламная информация нанесена на упаковку, указано на прилагаемом макете.


Мы подтверждаем, что изменения не вводят потребителя в заблуждение и не повлияют на качество, эффективность и безопасность медицинских изделий

Cover letter

We, OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN manufacturer of medical devices OMRON Automatic Blood Pressure Monitors: M2 Basic (HEM-7121-ALRU), M2 Basic (HEM-7121-ARU), M2 Basic (HEM-7121-RU), M2 Classic (HEM-7122-ALRU), M2 Classic (HEM-7122-LRU), M3 Eco (HEM-7131-ARU), M3 Expert (HEM-7132-ALRU), M3 Family (HEM-7133-ALRU), sends the layout of the labeling and packaging. Also, hereby ask you to accept the information that the packaging of a medical device may contain various marketing and advertising information, and we guarantee that this information does not contain data about the medical device, its purpose, storage conditions, use procedure (including indications and contraindications), parameters, characteristics, etc. The layout of marketing and advertising information with the description and explanation to it are attached. The place where marketing and advertising information is applied to the packaging is indicated on the attached layout.

We confirm that the changes do not mislead the consumer and will not affect the quality, effectiveness, and safety of medical devices.

December 21, 2022



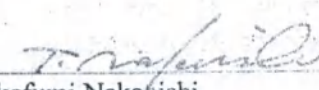

Takefumi Nakahishi
General Manager
Regulatory Affairs Department
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

オムロンヘルスケア株式会社
〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

1. Макет маркировки медицинского изделия. Medical device marking layout.

1.1. Маркировка изделия. Labeling of a medical device.

Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON: M2 Basic (HEM-7121-ALRU), M2 Basic (HEM-7121-RU), M2 Basic (HEM-7121-ARU)

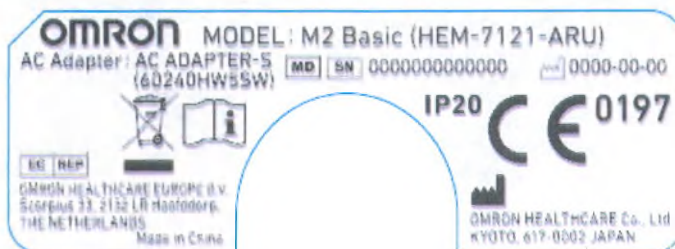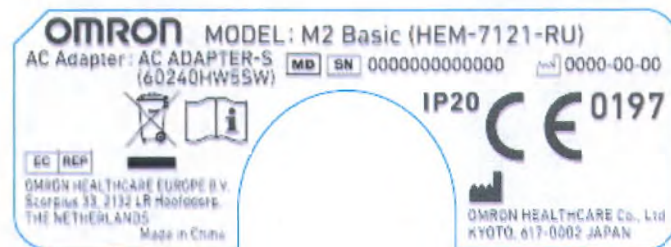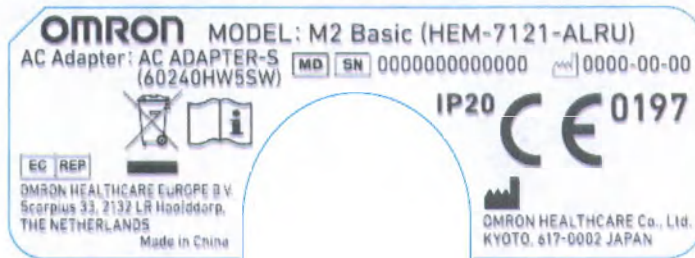



UDI






(01) XXXXXXXXXXXXXXXX

(21) XXXXXXXXXXXXXXXX





Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON: M2 Classic (HEM-7122-ALRU), M2 Classic (HEM-7122-LRU), M3 Eco (HEM-7131-ARU), M3 Expert (HEM-7132-ALRU), M3 Family (HEM-7133-ALRU)

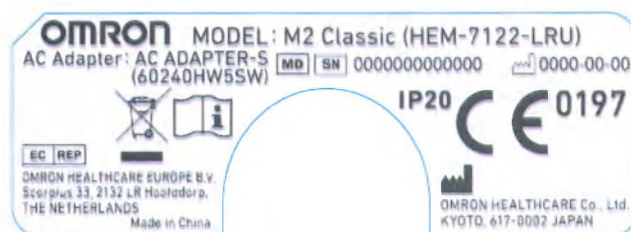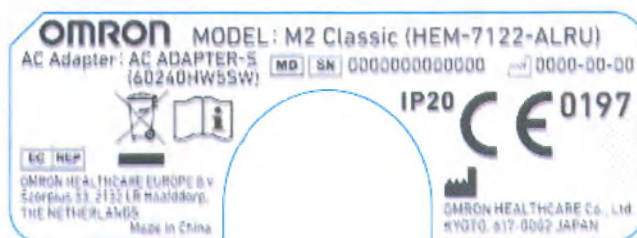

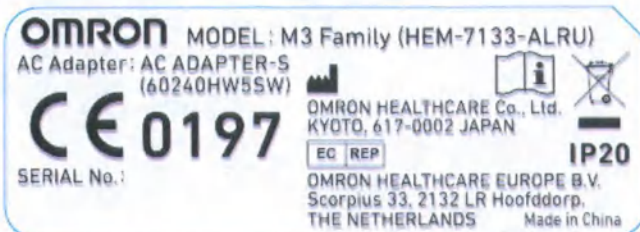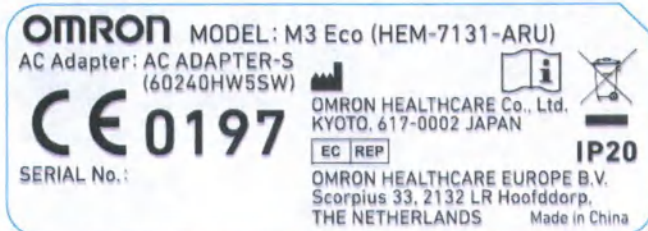
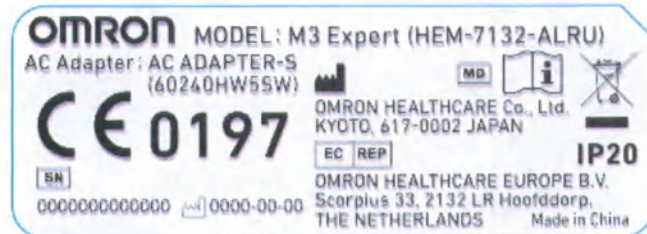


1.2. Маркировка на упаковке. Marking on the packaging.


Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON: M2 Basic (HEM-7121-ALRU), M2 Basic (HEM-7121-RU), M2 Basic (HEM-7121-ARU)

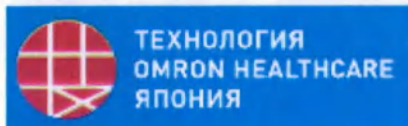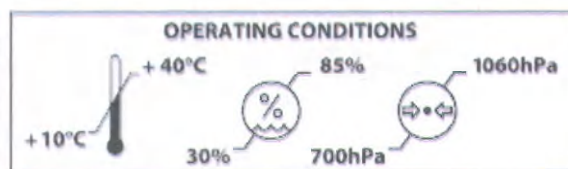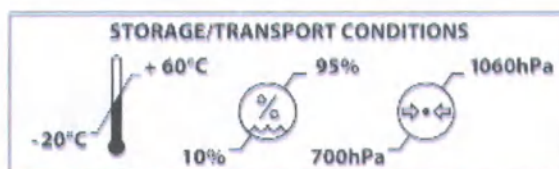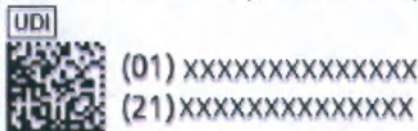


Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON: M2 Classic (HEM-7122-ALRU), M2 Classic (HEM-7122-LRU), M3 Eco (HEM-7131-ARU), M3 Expert (HEM-7132-ALRU), M3 Family (HEM-7133-ALRU)

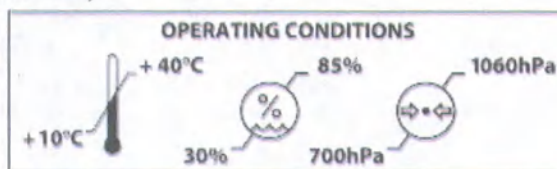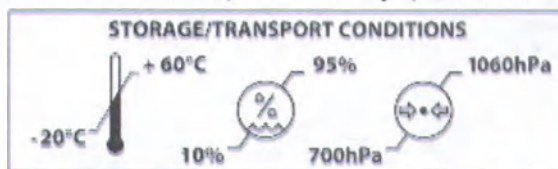

EAC C 0197

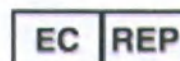

ТЕХНОЛОГИЯ
OMRON HEALTHCARE
ЯПОНИЯ

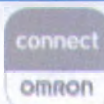

iPhone & Android™

2. Макет упаковки медицинского изделия. Medical device packaging layout.

M2 Basic (HEM-7121-ALRU)



M2 Basic (HEM-7121-RU)



M2 Basic (HEM-7121-ARU)

ТЕХНОЛОГИЯ
OMRON HEALTHCARE
ЯПОНИЯ

5
5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

OMRON

M2 Basic
Измеритель артериального давления
и частоты пульса автоматический

22-32 см

All for Healthcare

OMRON

	EN	RU
	M2 Basic Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M2 Basic (HEM-7121-ARU)
	IntelliSense technology Ensures more accurate and easy reading	Технология IntelliSense Обеспечивает еще более точные и легкие измерения
	Irregular Heartbeat Detection	Индикатор аритмии
	Fan-shaped Cuff (22-32 cm)	Вентириформная манжета 22-32 см
	Blood Pressure Level Indicator	Графическая шкала уровня АД позволяет оценить уровень, качество систолического и диастолического давления относительно нормальных значений для данного измерения (135/85 мм рт. ст.)
	30 memory capacity	Память на 30 измерений
	OMRON connect: Download the App, Get Connected. Access Anytime, See Progress.	OMRON connect: загрузите приложение. Подключитесь. Доступ в любое время. Наблюдайте за измерениями.
	Content: Main Unit, Arm Cuff, Instruction Manual, Storage Case, AC adapter, Battery set, Blood Pressure Diary, Guarantee Card.	Комплектация: Электронный блок, манжета надувная, инструкция по эксплуатации, чехол для хранения прибора, адаптер переменного тока AC ADAPTER-5 (60240HRS50), комплект элементов питания, журнал для записи артериального давления, гарантийный талон.

Уполномоченный представитель производителя, эксклюзивный дистрибутор и импортер медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации

АО "КомпексСервис"
125413, г. Москва, ул. Солнечная, д. 4, стр. 10, м. Комсомольская
www.complex.ru
Бесплатная горячая линия: 8-800-555-00-80

Model (model): M2 Basic (HEM-7121-ARU)

1 connect
omron
ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕЛЕФОН

2
ОТСКАНИРУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ С OMRON CONNECT

3
ТЕПЕРЬ ИЗМЕРЕНИЯ ПОД РУКОЙ

4
ОТСЛЕЖИВАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

См. также совместимый смартфон на странице: omronconnect.com/device
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт: omronconnect.com

OMRON

M2 Basic
Измеритель артериального давления
и частоты пульса автоматический

КЛИНИЧЕСКИ
АПРОБИРОВАН

CLINICALLY
VALIDATED

Intelli
sense

connect
omron

ИНДИКАТОР АРИТМИИ

All for Healthcare


Точное измерение в одно касание

Индикатор аритмии

Нормальное сердцебиение

Индикатор аритмии появится на экране, если ритм сердца отличается на 25% от среднего ритма при измерении давления. При частом появлении индикатора рекомендуется обратиться к врачу.



M2 Classic (HEM-7122-ALRU)

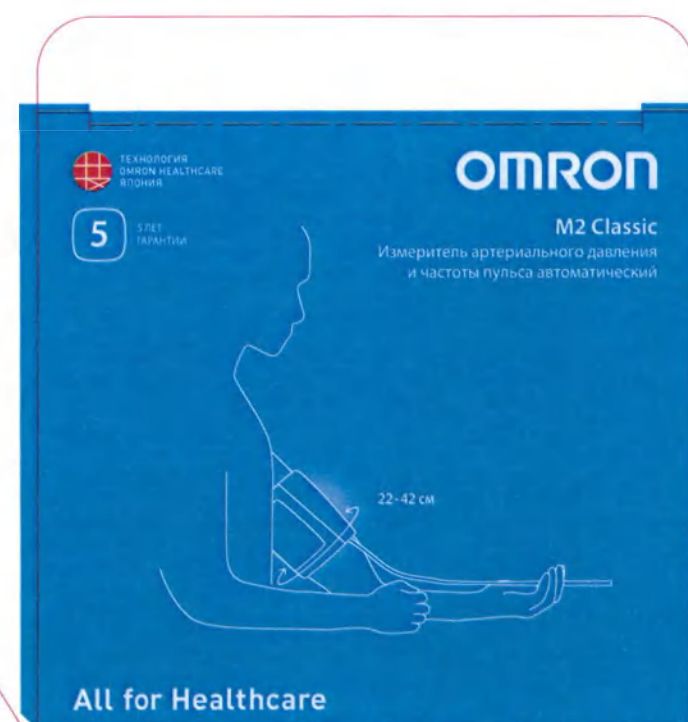

	EN	RU
	M2 Classic Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M2 Classic (HEM-7122-ALH0)
	Intelligence Technology Ensures more accurate and easy reading	Технология Intelligence Обеспечивает еще более точные и легкие измерения
	Irregular Heartbeat Detection	Индикатор аритмии
	Cuff Wrap Guide	Индикатор правильной фиксации манжеты
	Easy Cuff (22-42 cm)	Универсальная манжета 22-42 см
	Blood Pressure Level Indicator	Графическая шкала уровней АД позволяет оценить уровень риска систематиче- ского и диастолического давления относительно нормальных значений для данного возраста (135/85 мм рт. ст.)
	60 memory capacity	Память на 60 измерений
	OMRON connect: Download the App, Get Connected. Access Anytime. See Progress.	OMRON connect: загрузите приложение. Подключитесь. Доступ в любое время. Наблюдайте за изменениями
	Contents: Main Unit, Arm Cuff, Battery Set, Instruction Manual, AC Adapter, Storage Case, Blood Pressure Pouch, Guarantee Card	Комплектация: Измерительный блок, манжета универсальная HEM-817L, комплект элементов питания, руководство по эксплуатации, адаптер переменного тока AC ADAPTE5-5, чехол для хранения прибора, журнал для записи артериального давления, гарантийный талон

Уполномоченный представитель производителя,
эксклюзивный дистрибьютор и импортер медицинской
техники OMRON на территории Российской Федерации


АО "КомплексСервис"
125413, г. Москва, ул. Солнцевогорская, д. 4, стр. 10, мансарда
www.cstmeda.ru
Бесплатная горячая линия: 8-800-555-00-80

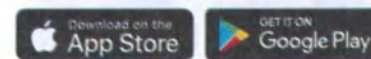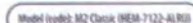

Смарт-совместимость (smartworks) на странице: emronconnect.com/devices
Для получения больше информации обращайтесь по телефону: info@emronconnect.com



All for Healthcare

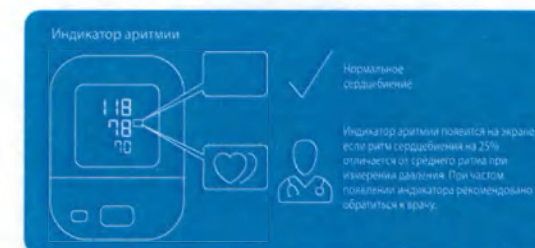

Agropecuaria S.A. SA
CALLE DEL COMERCIO 1000
SANTO DOMINGO DE LOS RIOS
GUAYAMA, P.R. 00946-1000
(787) 861-1100 FAX (787) 861-1101
www.agropecuaria.com

CE0197



PR-HEM-7122-ALRU-05-06/2019
4054559-4E
Made in China
(Castellano & Soriani)

Manufacturers
Spunacryon.
DAIICHI KASEI CHEMICAL Co., Ltd.
 (DAIICHI KASEI CHEMICAL Co., Inc.)
 51, Katsushika, Tama-shi, Tokyo, 192-0292
 03-5952-3000
 03, Katsushika, Tama-shi, Tokyo, 192-0292
 03-5952-3000

M2 Classic (HEM-7122-LRU)

TEХНОЛОГИЯ
OMRON HEALTHCARE
ЯПОНИЯ

OMRON

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

M2 Classic
Измеритель артериального давления
и частоты пульса автоматический

22-42 см

All for Healthcare

	EN	RU
	M2 Classic Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M2 Classic (HEM-7122-LRU)
	Intelli sense technology Ensures more accurate and easy reading	Технология IntelliSense Обеспечивает еще более точные и легкие измерения
	Irregular Heartbeat Detection	Индикатор аритмии
	Cuff Wrap Guide	Индикатор правильной фиксации манжеты
	Easy Cuff (22-42 cm)	Универсальная манжета 22-42 см
	Blood Pressure Level Indicator	Графическая шкала уровня АД позволяет оценить уровень вашего систолического и диастолического давления относительно нормальных значений для данного измерения (115/85 мм рт. ст.)
	60 memory capacity	Память на 60 измерений
	OMRON connect: Download the App. Get Connected. Access Anytime. See Progress.	OMRON connect: загрузите приложение. Подключитесь. Доступ в любое время. Наблюдайте за изменениями.
	Content: Main Unit, Arm Cuff, Battery Set, Instruction Manual, Storage Case, Blood Pressure Pads, Guarantee Card	Комплектация: Зарядный блок, манжета компрессионная HEM-00631, комплект значений давления, руководство по эксплуатации, чехол для хранения прибора, журнал для записи артериального давления, гарантийный талон



Уполномоченный представитель производителя, эксклюзивный дистрибутор и импортер медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации

АО "Томсксервис"
125413, г. Москва, ул. Сокольническая, д. 4, стр. 10, этаж 40
www.sotmedica.ru
Бесплатная горячая линия: 8-800-555-00-80

Model (code): M2 Classic (HEM-7122-LRU)



1 connect
omron

2

3

4

ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕЛЕФОН

ОТСКАНИРУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ С OMRON CONNECT

ТЕПЕРЬ ИЗМЕРЕНИЯ ПОД РУКОЙ

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Список совместимых смартфонов на странице: omronconnect.com/devices
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт: omronconnect.com

OMRON

M2 Classic
Измеритель артериального давления
и частоты пульса автоматический

Intelli sense

КЛИНИЧЕСКИ
АПРОБИРОВАН

CLINICALLY
VALIDATED

ИНДИКАТОР АРИТМИИ

ИНДИКАТОР ПРАВИЛЬНОЙ
ФИКСАЦИИ МАНЖЕТЫ

connect
omron

All for Healthcare

Точное измерение в одно касание

omron

SYS
118
DIA
78
PULSE
70

START
STOP

Индикатор аритмии

Нормальное сердцебиение


Индикатор аритмии появляется на экране, если ритм сердца отличается на 25% от нормального ритма при измерении давления. При частом появлении индикатора рекомендуется обратиться к врачу.

CE0197

Видеоинструкция по эксплуатации
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
1-1, Honcho, Bldg. 10th Floor, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8558, Japan
www.omron-healthcare.com

Видеоинструкция по эксплуатации
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
1-1, Honcho, Bldg. 10th Floor, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8558, Japan
www.omron-healthcare.com

Видеоинструкция по эксплуатации
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
1-1, Honcho, Bldg. 10th Floor, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8558, Japan
www.omron-healthcare.com

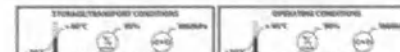

PN: HEM-7122-LRU-05-06/2019
405-4190-0E
Made in China
(Сделано в Китае)

Производитель:
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
1-1, Honcho, Bldg. 10th Floor, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8558, Japan
(Сделано в Китае)

M3 Eco (HEM-7131-ARU)

OMRON

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Intellisense

M3 ECO
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА АВТОМАТИЧЕСКИЙ

All for Healthcare

КЛИНИЧЕСКИ АПРОБИРОВАН

5

OMRON

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Intellisense

M3 ECO
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА АВТОМАТИЧЕСКИЙ

All for Healthcare

КЛИНИЧЕСКИ АПРОБИРОВАН

5

Графическая шкала уровня АД позволяет оценить уровень вашего систолического и диастолического давления относительно нормальных значений для домашних измерений (135/85 мм рт.ст.)

Если значение превышает норму, загорится соответствующий оранжевый индикатор Easy High Blood Pressure Level Indicator

Индикатор правильной фиксации манжеты Cuff Wrap Guide

Индикатор аритмии Irregular Heartbeat Detection

Память на 90 измерений с регистрацией даты и времени 90 Memories with date & time stamp

Веерообразная манжета 22-32 см Fan-shaped Cuff 22-32 cm

Среднее значение трех измерений за 10 минут Average Reading Function

Предотвращение инсульта. Выявление факторов риска инсульта Stroke prevention. Helps to detect stroke risk

Являясь ведущим мировым производителем профессионального и домашнего медицинского оборудования, компания OMRON предлагает широчайший выбор устройств, созданных на основе современной сенсорной технологии и микропроцессорного управления.

Тонометры компании OMRON помогают контролировать артериальную гипертензию – основной фактор риска развития инсульта. Наши тонометры являются высокоточными приборами для измерения артериального давления и выявления аритмии.

Возьмите свое здоровье под контроль!

Model (code) / Модель: M3 Eco (HEM-7131-ARU)

CE0197

4 015672 108479

Производство

Сделано в Китае (Сделано в Китае)

PK-HEM-7131-ARU-04-10/2015


4054558-6D

M3 Expert (HEM-7132-ALRU)



OMRON

	EN	RU
	M3 Expert Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M3 Expert (HEM-7132-ALRU)
	Intelli Sense Ensures more accurate and easy reading	Технология IntelliSense Обеспечивает еще более точные и легкие измерения
	Cuff wrap guide	Индикатор правильной фиксации манжеты
	Easy High Blood Pressure Level Indicator	Световой индикатор артериального давления Если значение превышает норму, загорится соответствующий оранжевый индикатор
	Irregular heartbeat detection	Индикатор аритмии
	100 memories with date & time stamp	Память на 100 измерений с регистрацией даты и времени
	Average reading function	Среднее значение трех измерений за 10 минут
	Body movement detection	Индикатор движения
	Easy Cuff (22-42 cm)	Универсальная манжета 22-42 см
	OMRON connect: Download the App, Get Connected. Access Anytime. See Progress.	OMRON connect: загрузите приложение, Подключитесь. Доступ в любое время. Наблюдайте за изменениями.
	Content: Main Unit, Arm Cuff, Instruction Manual, Storage Case, AC Adapter, Battery Set, Blood Pressure Pads, Guarantee Card	Комплектация: Электронный блок, манжета измерительная HEM-ARM31, руководство по эксплуатации, чехол для хранения прибора, адаптер переменного тока AC ADAPTER-S (602-4090555), комплект элементов питания, журнал для записи артериального давления, гарантийный талон

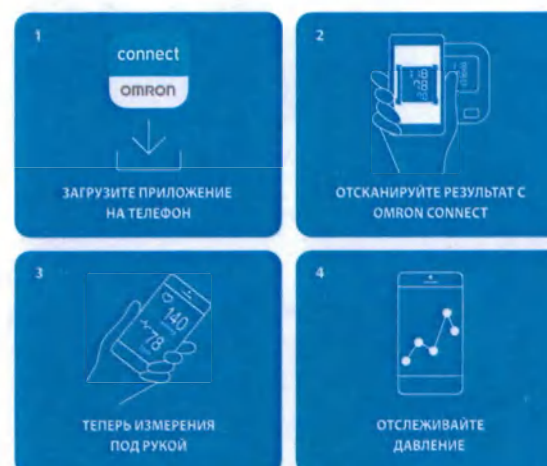

CS CODE MEDIA

Уполномоченный представитель производителя, эксклюзивный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации
АО "КоштекстСервис"
125413, г. Москва, ул. Солнечногогорская, д. 4, стр. 10, этаж 3
www.cosmedix.ru
Бесплатная горячая линия: 8-800-555-00-00



OMRON

M3 Expert
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический



Intelli sense
КЛИНИЧЕСКИ АПРОБИРОВАН
CLINICALLY VALIDATED



ИНДИКАТОР ПРАВИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ МАНЖЕТЫ
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Точное измерение в одно касание



Индикатор правильной фиксации манжеты



All for Healthcare

CE0197
EC REP
Производитель
Промышленные Технологии
(Корпус 13, 2132 00) (Корпус 13, 2132 00) (Корпус 13, 2132 00)
OMRON HEALTHCARE CO., LTD.
1-1, Honcho, Bldg. 1, 1F, Shinjyuku-ku, Tokyo 163-8501, Japan
© 2019 Omron Healthcare Co., Ltd. All rights reserved.



Model (code): M3 Expert (HEM-7132-ALRU)
HEM-7132-ALRU-05-06/2019
4024557-06
Made in China
(Сделано в Китае)
Manufacturer
Промышленные Технологии
OMRON HEALTHCARE CO., LTD.
1-1, Honcho, Bldg. 1, 1F, Shinjyuku-ku, Tokyo 163-8501, Japan
© 2019 Omron Healthcare Co., Ltd. All rights reserved.

M3 Family (HEM-7133-ALRU)

OMRON

M3 FAMILY
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Аll for Healthcare

2 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПО 60 ИЗМЕРЕНИЙ

Intellisense

КЛИНИЧЕСКИ
АПРОБИРОВАН

5 лет гарантии

OMRON

M3 FAMILY
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Аll for Healthcare

2 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПО 60 ИЗМЕРЕНИЙ

Intellisense

КЛИНИЧЕСКИ
АПРОБИРОВАН

5 лет гарантии

Графическая шкала уровня АД позволяет оценить уровень вашего систолического и диастолического давления относительно нормальных значений для домашних измерений (135/85 мм рт. ст.)

Если значение превышает норму, загорится соответствующий оранжевый индикатор
Easy High Blood Pressure Level Indicator

Индикатор правильной фиксации манжеты
Cuff Wrap Guide

Индикатор аритмии
Irregular Heartbeat Detection

Пам'ять для 2-х пользователей по 60 измерений с регистрацией даты и времени
2 Users x 60 Memories with date & time stamp

Универсальная манжета 22-42 см
Easy Cuff 22-42 cm

Среднее значение трех измерений за 10 минут
Average Reading Function

Индикатор движения
Body Movement Detection

Предотвращение инсульта. Выявление факторов риска инсульта
Stroke prevention. Helps to detect stroke risk

Входящая в комплект:

- Электронный блок • Monitor
- Манжета компрессионная HEM-RML31 • Arm Cuff
- Руководство по эксплуатации • Instruction Manual
- Чехол для хранения прибора • Storage Case
- Адаптер переменного тока AC ADAPTER-S (60240HWSSW) • AC Adapter
- Комплект элементов питания • Battery Set
- Журнал для записи артериального давления • Blood Pressure Pass
- Гарантийный талон • Guarantee Card

Являясь ведущим мировым производителем профессионального и домашнего медицинского оборудования, компания OMRON предлагает широчайший выбор устройств, созданных на основе современной сенсорной технологии и микропроцессорного управления.

Тонометры компании OMRON помогают контролировать артериальную гипертензию – основной фактор риска развития инсульта. Наши тонометры являются высокоточными приборами для измерения артериального давления и выявления аритмии.

Возьмите свое здоровье под контроль!

Model (code) / Модель: M3 Family (HEM-7133-ALRU)

Производство
Промышленное предприятие
OMRON DALLAS Co., Ltd.
(OMRON DALLAS Co., Ltd.)

Storage / Transport Conditions

Operating Conditions

Made in China (Сделано в Китае)
PK-HEM-7133-ALRU-03-10/2015
4054556-0C

**3. Макет маркетинговой и рекламной информации с описанием и пояснением.
Layout of marketing and advertising information with description and explanation.**

1. Sticker "OMRON tonometers No. 1, in the recommendations of cardiologists in Russia and Europe*.

*based on representative results in Russia and Europe from the point of view of the general population of cardiologists, conditions by percentage/proportion of cardiologists, proportion of patients; geographical coverage: from 8 to 20 regions per participating country, Research by Kantar GmbH, November 2019".

"Technology and Quality. JAPAN".

Explanation:

The sign "OMRON Tonometers No. 1, in the recommendations of cardiologists of Russia and Europe" is applied to the packaging in order to inform consumers about the results of independent studies conducted by Kantar GmbH in Russia and Europe.

1. Наклейка «Тонометры OMRON № 1, в рекомендациях кардиологов России и Европы*.

*на основании репрезентативных результатов в России и Европе с точки зрения генеральной совокупности кардиологов, условий по проценту/доле кардиологов, доле пациентов; географический охват: от 8 до 20 регионов на участвующую страну, Исследования Kantar GmbH, ноябрь 2019».

«Технология и Качество. ЯПОНИЯ».

Пояснение:

Знак «Тонометры OMRON № 1, в рекомендациях кардиологов России и Европы» наносится на упаковку с целью информирования потребителей о результатах независимых исследований, проводимых компанией Kantar GmbH в России и Европе.



2. Sticker «BRAND No.1 IN RUSSIA»

Explanation:

Sticker «BRAND No.1 IN RUSSIA» is applied to the package to inform consumers that the «OMRON» trademark is a winner of the annual independent consumer confidence award «BRAND No. 1 IN RUSSIA» ® 2021 in the category «Medical equipment (blood pressure monitor) ».

2. Наклейка «МАРКА №1 В РОССИИ»

Пояснение:

Наклейка «МАРКА №1 В РОССИИ» наносится на упаковку с целью информирования потребителей о том, что торговая марка OMRON – победитель ежегодной независимой премии доверия потребителей «МАРКА №1 В РОССИИ» ® 2021 в категории «Медицинская техника (тонометр)».



3. Sticker «SALES LEADER*.

*Data from IQUVIA Solutions LLC, audit of medical devices in the Russian Federation for 2020.

Explanation:

The LEADER OF SALES sign is applied to the packaging in order to inform consumers about the results of independent research conducted by AYQUVIA Solutions, an audit of medical devices in the Russian Federation.

3. Наклейка «ЛИДЕР ПРОДАЖ*.

*Данные ООО «АЙКЬЮВИА Солюшнс», аудит мед.приборов в РФ за 2020 год».

Пояснение:

Знак «ЛИДЕР ПРОДАЖ» наносится на упаковку с целью информирования потребителей о результатах независимых исследований, проводимых АЙКЬЮВИА Солюшнс», аудит мед.приборов в РФ.



4. Место расположения рекламной информации на упаковке медицинского изделия. Location of advertising information on the packaging of a medical product

M2 Basic (HEM-7121-ALRU)



ТЕХНОЛОГИЯ
OMRON HEALTHCARE
ИНТЕРНЕТ

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

OMRON

M2 Basic
Измеритель артериального давления
и частоты пульса автоматический



22-32 см

All for Healthcare

	EN	RU
	M2 Basic Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M2 Basic (HEM-7121-RU)
	IntelliSense technology Ensures more accurate and easy reading	Технология IntelliSense Обеспечивает еще более точное и легкое измерение
	Irregular Heartbeat Detection	Индикатор аритмии
	Tan-shaped cuff (22-32 cm)	Векторобразная манжета 22-32 см
	Blood Pressure Level Indicator	Графическая шкала уровня АД позволяет принять уровень вашего систолического и диастолического давления относительно нормальных значений для домашних измерений (135/85 мм рт. ст.)
	30 memory capacity	Память на 30 измерений
	OMRON connect: Download the App, Get Connected, Access Anytime, See Progress.	OMRON connect: загрузите приложение. Подключитесь. Доступ в любое время. Наблюдайте за изменениями.
	Content: Main Unit, Arm Cuff, Batteries, Instruction Manual, Storage Case, Blood Pressure Pics, Guarantee Card.	Комплектация: Электронный блок, манжета компрессионная СМ, комплект элементов питания, руководство по эксплуатации, чехол для хранения прибора, журнал для записи артериального давления, гарантийный талон.

CS Уполномоченный представитель производителя,
эксклюзивный дистрибутор и импортер медицинской
техники OMRON на территории Российской Федерации

АО "КомплектСервис"
125413, г. Москва, ул. Солнечного скана, д. 4, стр. 10, мансарда
www.csmedica.ru
Бесплатная горячая линия: 8-800-555-00-80



1 connect
omron
↓
ЗАГРУЗИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
НА ТЕЛЕФОН

2
↓
ОТСКАНИРУЙТЕ
РЕЗУЛЬТАТ С
OMRON CONNECT

3
↓
ТЕПЕРЬ ИЗМЕРЕНИЯ
ПОД РУКОЙ

4
↓
ОТСЛЕЖИВАЙТЕ
ДАВЛЕНИЕ

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Список совместимых смартфонов на странице: omronconnect.com/devices
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт: omronconnect.com

НАРОДНАЯ МАРКА
по результатам
голосования
в РОССИИ

OMRON

M2 Basic
Измеритель артериального давления
и частоты пульса автоматический



ЛИДЕР
ПРОДАЖ

КЛИНИЧЕСКИ
АПРОБИРОВАН

CLINICALLY
VALIDATED

connect
omron

ИНДИКАТОР АРИТМИИ

Точное измерение в одно касание



Индикатор аритмии


Нормальные
систолические

Индикатор аритмии помечает на экране,
если ритм сердца отличается на 25%
от среднего ритма при
измерении давления. При частоте
помечений индикатора рекомендуется
обратиться к врачу.

CE0197

RECEIVED

EC REP

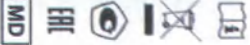

STORAGE/TRANSPORT CONDITIONS
OPERATING CONDITIONS

PH-HEM 7121-01J-02-06/2022
4054563-25
Made in China
(Сделано в Китае)

Manufacturer
Omnicon HealthCare Co., Ltd.
(OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)
11, Katsushika, Bunkyo-ku, Tokyo, 118-0101,
457-0001 JAPAN
(55) Krasnodar, Tselnyy ul. 100, 61001,
617-0001 RUSSIA

M2 Basic (HEM-7121-ARU)



	EN	RU
	M2 Basic Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M2 Basic (HEM-7121-ARU)
	IntelliSense technology Ensures more accurate and easy reading	Технология IntelliSense Обеспечивает еще более точные и легкие измерения
	Irregular Heartbeat Detection	Индикатор аритмии
	Fan-shaped Cuff (22-32 cm)	Вентириформная манжета 22-32 см
	Blood Pressure Level Indicator	Графическая шкала уровня АД позволяет оценить уровень общего систолического и диастолического давления относительно нормальных значений для домашнего измерения (135/85 mm Hg).
	30 memory capacity	Память на 30 измерений
	OMRON connect: Download the App. Get Connected. Access Anytime. See Progress.	OMRON connect: загрузите приложение. Подключайтесь. Доступ в любое время. Наблюдайте за изменениями.
	Content: Main Unit, Arm Cuff, Instruction Manual, Storage Case, AC adapter, Battery set, Blood Pressure Diary, Guarantee Card.	Комплектация: Электронный блок, манжета компрессионная АД, руководство по эксплуатации, чехол для хранения прибора, адаптер переменного тока AC ADAPTER-5 (60/400VAC/50Hz), комплект элементов питания, журнал для записи артериального давления, гарантийный талон.



Уполномоченный представитель производителя, эксклюзивный дистрибьютор в импортер медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации

АО "СамсонитСервис"
125413, г. Москва, ул. Саломеиховская, д. 4, стр. 10, мансарда
www.samsonit.ru
Бесплатная горячая линия: 8-800-555-00-80

Model (type): M2 Basic (HEM-7121-ARU)



Скачайте официальное приложение на смартфон: omronconnect.com/ru/ios
Для получения более подробной информации посетите сайт: omronconnect.com




Точное измерение в одно касание



All for Healthcare


CE0197

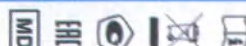

PN: HEM-7121-ARU-07-06/2002
4054562-405
Made in China
(Carmaxia in Korea)

Импортер
СамсонитСервис
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
OMRON ELECTRONICS Co., Ltd.
5-1, Kunitachi, Tama-shi, Tokyo, 100-8571
612-0002 20941
03-5962-0000, 03-5962-0001, 03-5962-0002

M2 Classic (HEM-7122-ALRU)

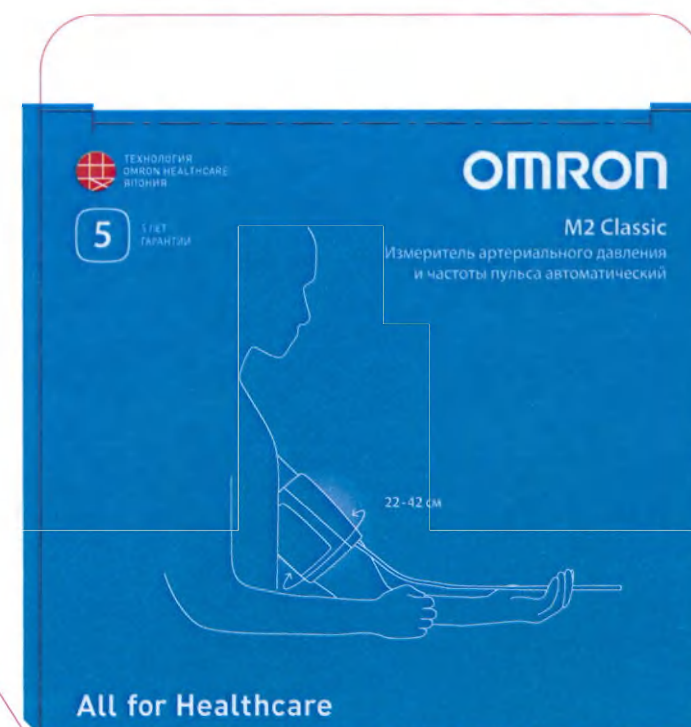

	EN	RU
	M2 Classic Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M2 Classic (HEM-7122-ALRU)
	IntelliSense technology Ensures more accurate and easy reading	Технология IntelliSense Обеспечивает еще более точные и легкие измерения
	Irregular Heartbeat Detection	Индикатор аритмии
	Cuff Wrap Guide	Индикатор правильной фиксации манжеты
	Easy Cuff (22-42 cm)	Универсальная манжета 22-42 см
	Blood Pressure Level Indicator	Графическая шкала уровня АД позволяет оценить уровень риска в систолического и диастолического давления относительно нормальных значений для данного измерения (135/85 мм рт. ст.)
	60 memory capacity	Память на 60 измерений
	OMRON connect. Download the App. Get Connected. Access Anytime. See Progress.	OMRON connect: загрузите приложение. Подключитесь. Доступ в любой момент. Наблюдайте за состоянием.
	Contents: Main Unit, Arm Cuff, Battery Set, Instruction Manual, AC Adapter, Storage Case, Blood Pressure Pouch, Guarantee Card	Комплектация: Электронный блок, манжета напульсниковая HEM-806L31, комплект элементов питания, руководство по эксплуатации, адаптер переменного тока AC ADAPTER-5 (100-240V/50/60Hz), чехол для хранения прибора, сумка для защиты артериального давления, гарантийный талон

CS Уполномоченный представитель производителя, исключительный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации
АО "Самсонит-Сервис"
125413, г. Москва, ул. Солнечная, д. 4, стр. 10, мансарда
info.csmedica.ru
Бесплатная горячая линия: 8-800-555-00-90



connect
omron

ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕЛЕФОН

ОТСКАНИРУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ С OMRON CONNECT

ТЕПЕРЬ ИЗМЕРЕНИЯ ПОД РУКОИ

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Смарт-совместимый смартфон на странице: omronconnect.com/devices
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт: omronconnect.com

ТОНОМЕТРЫ OMRON

No.1

в рекомендациях КАРДИОЛОГОВ России и Европы*

OMRON

M2 Classic

Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический

КЛИНИЧЕСКИ АПРОБИРОВАН

CLINICALLY VALIDATED

ИНДИКАТОР АРИТМИИ

ИНДИКАТОР ПРАВИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ МАНЖЕТЫ

Точное измерение в одно касание



Индикатор аритмии

Нормальное сердцебиение

Индикатор аритмии появится на экране, если ритм отличается на 25% от среднего ритма при измерении давления. При частоте появления индикатора рекомендуется обратиться к врачу.


CE0197

Производитель: Omron Healthcare Co., Ltd.
1-1, Honcho, Bldg. 2F, Hongo, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8681, Japan
Российский представитель:
АО "Самсонит-Сервис"
125413, г. Москва, ул. Солнечная, д. 4, стр. 10, мансарда
info.csmedica.ru
Бесплатная горячая линия: 8-800-555-00-90

HEM-7122-ALRU-05-06/2019
40045319-4E
Made in China
(Canton and Hainan)

Производитель:
Omron Healthcare Co., Ltd.
1-1, Honcho, Bldg. 2F, Hongo, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8681, Japan
Российский представитель:
АО "Самсонит-Сервис"
125413, г. Москва, ул. Солнечная, д. 4, стр. 10, мансарда
info.csmedica.ru
Бесплатная горячая линия: 8-800-555-00-90

M2 Classic (HEM-7122-LRU)

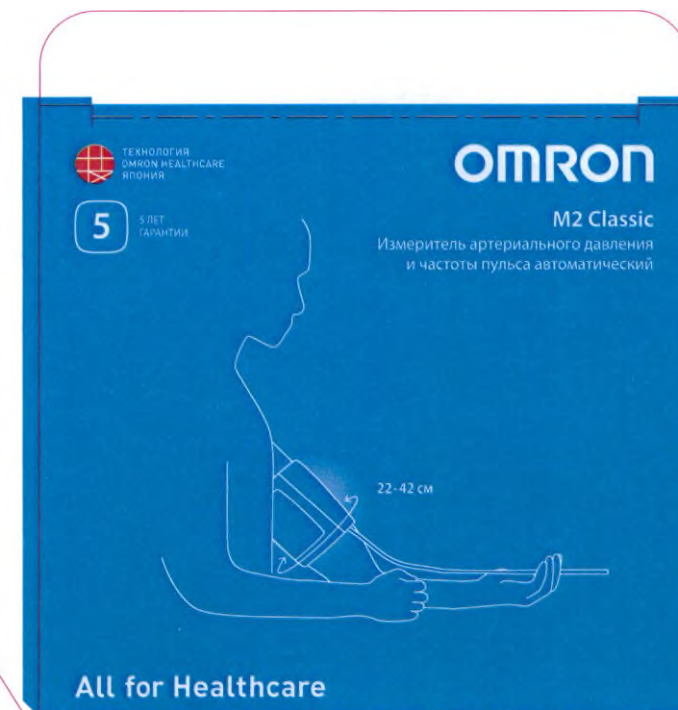

	EN	RU
	M2 Classic Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M2 Classic (HEM-7122-LRU)
	IntelliSense technology Ensures more accurate and easy reading	Технология IntelliSense Обеспечивает еще более точное и легкое измерение
	Irregular Heartbeat Detection	Индикатор аритмии
	Cuff Wrap Guide	Индикатор правильной фиксации манжеты
	Easy Cuff (22-42 cm)	Универсальная манжета 22-42 см
	Blood Pressure Level Indicator	Графическая шкала уровня АД позволяет оценить уровень риска сердечнососудистой и сосудистых заболеваний относительно нормальных значений для данного человека (135/85 мм рт. ст.)
	60 memory capacity	Память на 60 измерений
	OMRON connect. Download the App, Get Connected. Access Anytime, See Progress.	OMRON connect: загрузите приложение. Подключитесь. Доступ в любое время. Наблюдайте за изменениями.
	Content: Main Unit, Arm Cuff, Battery Set, Instruction Manual, Storage Case, Blood Pressure Pads, Guarantee Card	Комплектация: Электронный блок, манжета компрессионная HEM-00631, комплект элементов питания, руководство по эксплуатации, чехол для хранения прибора, журнал для записи артериального давления, гарантийный талон

CS Уполномоченный представитель производителя, эксклюзивный дистрибьютор и импортёр медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации

АО "Система Сервис"
125413, г. Москва, ул. Солнечная, д. 4, стр. 10, мансарда
www.sistemase.ru
Бесплатная горячая линия: 8-800-555-00-00



connect
omron

ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕЛЕФОН

ОТСАНИРУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ С OMRON CONNECT

ТЕПЕРЬ ИЗМЕРЕНИЯ ПОД РУКОЙ

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Скачать приложение можно на странице: www.omronconnect.com/ru
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт: www.omronconnect.com

ТОНОМЕТРЫ
OMRON

No.1

в рекомендациях
КАРДИОЛОГОВ
России и Европы*

OMRON

M2 Classic

Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический

КЛИНИЧЕСКИ АПРОБИРОВАН

CLINICALLY VALIDATED

ИНДИКАТОР АРИТМИИ

ИНДИКАТОР ПРАВИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ МАНЖЕТЫ

Точное измерение в одно касание



Индикатор аритмии

Нормальное сердцебиение

Индикатор аритмии появится на экране, если ритм сердцебиения на 25% отличается от среднего ритма при измерении давления. При частом появлении индикатора рекомендуется обратиться к врачу.

All for Healthcare

CE 0197

Производитель
OMRON HEALTHCARE CO., LTD.
51, Honcho, Toho-ku, Tokyo, 100-8565, Japan
Сделано в Китае
Сделано в Китае

Импортер
АО "Система Сервис"
125413, г. Москва, ул. Солнечная, д. 4, стр. 10, мансарда
www.sistemase.ru
Бесплатная горячая линия: 8-800-555-00-00

STANDARD CONDITIONS

STORAGE TEMPERATURE: 5°C to 40°C

OPERATING TEMPERATURE: 5°C to 40°C

RELATIVE HUMIDITY: 20% to 80%

POWER SUPPLY: AC 100-240V, 50/60Hz

MODEL: HEM-7122-LRU-05-06/2019

405-4500-BE

Made in China

(Capitales y Kariel)


Manufacturer
OMRON HEALTHCARE CO., LTD.
51, Honcho, Toho-ku, Tokyo, 100-8565, Japan
Сделано в Китае
Сделано в Китае

M3 Expert (HEM-7132-ALRU)

ТЕХНОЛОГИЯ
OMRON HEALTHCARE
INTELLENCE

5
ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

OMRON
M3 Expert
Измеритель артериального давления
и частоты пульса автоматический

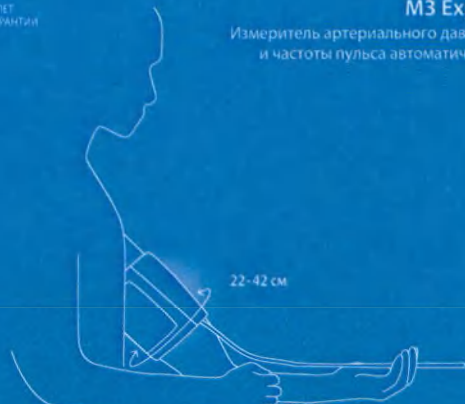
22-42 см

All for Healthcare

	EN	RU
	M3 Expert Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M3 Expert (HEM-7132-ALRU)
	Intelli sense technology Ensures more accurate and easy reading	Технология Intellisense Обеспечивает еще более точное и легкое измерение
	Cuff wrap guide	Индикатор правильной фиксации манжеты
	Easy High Blood Pressure Level Indicator	Световой индикатор артериального давления Если значение превышает норму, загорится соответствующий оранжевый индикатор
	Irregular heartbeat detection	Индикатор аритмии
	100 memories with date & time stamp	Память на 100 измерений с регистрацией даты и времени
	Average reading function	Среднее значение трех измерений за 10 минут
	Body movement detection	Индикатор движения
	Easy Cuff (22-42 cm)	Универсальная манжета 22-42 см
	OMRON connect: Download the App. Get Connected. Access Anytime. See Progress.	OMRON connect: загрузите приложение. Подключитесь. Доступ в любое время. Наблюдайте за изменениями.
	Content: Main Unit, Arm Cuff, Instruction Manual, Storage Case, AC Adapter, Battery Set, Blood Pressure Pouch, Guarantee Card	Комплектация: Электронный блок, манжета компрессионная HEM-800L11, руководство по эксплуатации, чехол для хранения прибора, адаптер переменного тока AC ADAPTER-5 (60/50HZ/55W), комплект элементов питания, журнал для записи артериального давления, гарантийный талон

1 connect
omron
ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
НА ТЕЛЕФОН

2
ОТСКАНИРУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ С
OMRON CONNECT

3
ТЕПЕРЬ ИЗМЕРЕНИЯ
ПОД РУКОЙ

4
ОТСЛЕЖИВАЙТЕ
ДАВЛЕНИЕ

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Скачайте приложение с экрана: omronconnect.com/devices
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт: omronconnect.com

CS
САН МЕДИКА

Уполномоченный представитель производителя,
эксклюзивный дистрибутор и импортер медицинской
техники OMRON на территории Российской Федерации

АО "Санмедика"
125413, г. Москва, ул. Солнечная, д. 4, стр. 10, мансарда
www.csmedica.ru
Бесплатная горячая линия: 8-800-555-00-80



ТОНОМЕТРЫ
OMRON
No.1
в рекомендациях
КАРДИОЛОГОВ
России и Европы

OMRON
M3 Expert
Измеритель артериального давления
и частоты пульса автоматический



КЛИНИЧЕСКИ
АПРОБИРОВАН

Intelli
sense
CLINICALLY
VALIDATED

ИНДИКАТОР ПРАВИЛЬНОЙ
ФИКСАЦИИ МАНЖЕТЫ

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Точное измерение в одно касание



Индикатор правильной фиксации манжеты



OK

CE0197

Производитель: OMRON HEALTHCARE CO., LTD.
1-3-3, Honcho, Bldg. 2F, Abeno-ku, Osaka 595-8501, Japan
Дистрибутор: АО "Санмедика", 125413, г. Москва, ул. Солнечная, д. 4, стр. 10, мансарда
Тел: +7 (495) 707-00-80, факс: +7 (495) 707-00-81, e-mail: info@csmedica.ru
Сайт: www.csmedica.ru

EC REP





Model (code): M3 Expert (HEM-7132-ALRU)

STANDARD TEMPERATURE COEFFICIENT: 0.01%/°C (25°C to 35°C)
OPERATING TEMPERATURE: 5°C to 40°C

PK-HEM-7132-ALRU-05-06/2019
4054552-02
Made in China
(Сделано в Китае)



Импортер:
АО "Санмедика"
125413, г. Москва, ул. Солнечная, д. 4, стр. 10, мансарда
Тел: +7 (495) 707-00-80, факс: +7 (495) 707-00-81, e-mail: info@csmedica.ru
Сайт: www.csmedica.ru

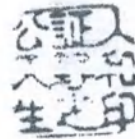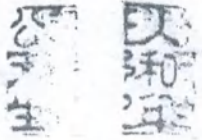

Takefumi Nakanishi
General Manager
Regulatory Affairs Department
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

T. Nakanishi

オムロンヘルスケア株式会社
〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

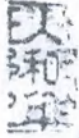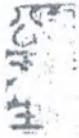

令和4年 第 668 号

1

認 証 証 書

2

嘱託人中西剛文の代理人有田紘子は、本日、本公証
人の面前において、別紙私署証書における嘱託人の署
名を同人に代わり自認した。

3

4

5

よって、これを認証する。

6

令和4年12月21日、本公証人役場において。

7

京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436番地の2

8

シカタ ディス ビル5階

9

京都地方法務局所属

10

公証人

天野 和生



12

13

14

15

16

17

18

19

20

公証人役場


it
Ltd.

Registered No.668

NOTARIAL CERTIFICATE

This is to certify that Hiroko Arita, an agent of Takefumi Nakanishi, has stated in my very presence that said Takefumi Nakanishi, has acknowledged himself that signature on the attached document is his own.


Dated this 21st day of Dec. 2022

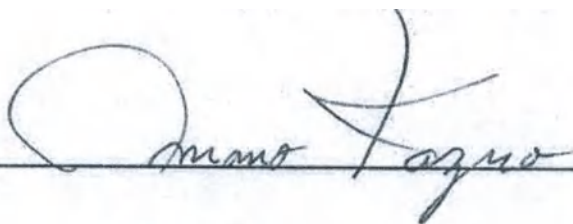

AMANO Kazuo

Notary

436-2 Sasayamachi, Oike-sagaru,
Higashinotoin dori, Nakagyo-ku Kyoto
Kyoto District Legal Affairs Bureau

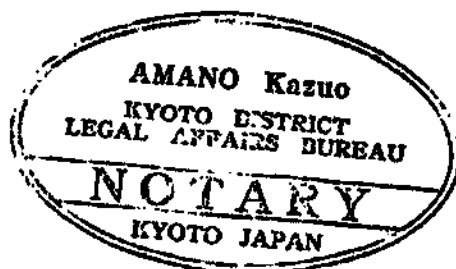



9 2 号




証

明

この認証の付与は、在職中の公証人がその権限に基づいてしたものであり、かつ、その押印は、真実のものであることを証明する。

令和 4 年 1 2 月 2 1 日

京都地方法務局長 新 宮 高 明

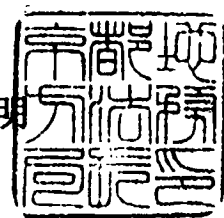

Registration No. 892

C E R T I F I C A T E

This is to certify that the annexed Notarial Certificate has been executed by Notary, duly authorized and practising in Kyoto , Japan , and that the Official seal appearing on the same is genuine.

Date 2022.12.21

SHINGUU Takaaki

Director of the Kyoto District Legal Affairs Bureau

Перевод с английского языка на русский язык

ОМРОН (OMRON)
№: OHQ(CS)-RAF-221006

21 декабря 2022 года

[подпись]

Такефуми Наканиси

Генеральный управляющий

Подразделение нормативно-правового регулирования

ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд. (OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)

ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд. (OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)
53, Кунотсубо, Терадо-чо, Муко, КИОТО, 617-0002 ЯПОНИЯ

[подпись]

Такефуми Наканиси

Генеральный управляющий

Подразделение нормативно-правового регулирования

ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд. (OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)

ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд. (OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.)

53, Кунотсубо, Терадо-чо, Муко, КИОТО, 617-0002 ЯПОНИЯ

Регистрационный номер: 668

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящим подтверждается, что Хироко Арита, агент Такефуми Наканиси, подтвердил в моем присутствии, что указанный Такефуми Наканиси подтвердил подлинность своей подписи, проставленной в прилагаемом документе.

Дата: сегодня, 21 декабря 2022 года

[подпись]

Кацуо Аmano

Нотариус

436-2 Сасаямачи, Ойке-сагару,

Хигашинотоин дори, Накагио-ку Киото

Региональное бюро по юридическим вопросам, Киото

[Печать:

Кацуо Аmano

Региональное бюро по юридическим вопросам, Киото

НОТАРИУС

КИОТО, ЯПОНИЯ]

Регистрационный номер: 892

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящим подтверждается, что прилагаемое Нотариальное свидетельство было оформлено Нотариусом, надлежащим образом уполномоченным и осуществляющим свою деятельность в Киото, Япония, а также, что Официальная печать, проставленная на данном документе, является подлинной.

Дата: 21.12.2022 г.

СИНГУУ Такааки

Директор Регионального бюро по юридическим вопросам, Киото

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Черноситовым Сергеем Игорьевичем.

ПОДПИСЬ

Российская Федерация
Город Москва

Четырнадцатого февраля две тысячи двадцать третьего года

Я, Юракова Диана Шевкетовна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Корсик Марии Александровны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Черноситова Сергея Игорьевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2023- 11-1809

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

ПОДПИСЬ

Д.Ш. Юракова

Гербовая печать
нотариуса г. Москвы
Корсик М. А.

Гербовая печать
нотариуса г. Москвы
Корсик М. А.



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 28 лист(а)(ов)

врио Нотариуса

ПОДПИСЬ

Российская Федерация
Город Москва

Четырнадцатого февраля две тысячи двадцать третьего года

Я, Юракова Диана Шевкетовна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Корсик Марии Александровны, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2023- 11-1810

Уплачено за совершение нотариального действия: 2800 руб. 00 коп.



Д.Ш. Юракова

Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 28 лист(а) (ов)

врио Нотариуса

Д.Ш. Юракова

**Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические
OMRON: M2 Basic (HEM-7121-ALRU), M2 Basic (HEM-7121-RU), M2
Basic (HEM-7121-ARU), M2 Classic (HEM-7122-ALRU), M2 Classic
(HEM-7122-LRU), M3 Eco (HEM-7131-ARU), M3 Expert (HEM-7132-
ALRU), M3 Family (HEM-7133-ALRU)**

1. Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M2 Basic (HEM-7121-ALRU), в комплектации

1. Электронный блок



2. Манжета компрессионная HEM-RML31



3. Руководство по эксплуатации

RU

OMRON

Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический



M2 Basic (HEM-7121-ALRU)
Руководство по эксплуатации

IM-HEM-7121-ALRU-RU-06-06/2022
7999795-6F

Дата выпуска: 2022-07-28



Введение

Благодарим Вас за приобретение цифрового автоматического тонометра OMRON M2 Basic.

OMRON M2 Basic — это компактный, полностью автоматический измеритель артериального давления и частоты пульса, работающий на основе осциллометрического метода. Он легко и быстро измеряет артериальное давление и частоту пульса. Прибор использует усовершенствованную технологию «IntelliSense», которая обеспечивает комфортное для пациента нагнетание воздуха в манжету без предварительной установки требуемого уровня давления воздуха или его повторной накачки.

Назначение


Это устройство предназначено для измерения артериального давления и частоты пульса у людей с соответствующей данной манжете длиной окружности плеча и при условии выполнения инструкций в этом руководстве. Прибор определяет наличие нерегулярного сердцебиения во время измерения и отображает предупреждающий индикатор вместе с результатами измерения. Рекомендуется преимущественно для использования в домашних условиях.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и следуйте приведенным в нем инструкциям для обеспечения вашей безопасности. Сохраните его для получения необходимых сведений в будущем. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ относительно конкретных значений Вашего артериального давления.

4. Чехол для хранения прибора




5. Адаптер переменного тока AC ADAPTER-S (60240HW5SW)

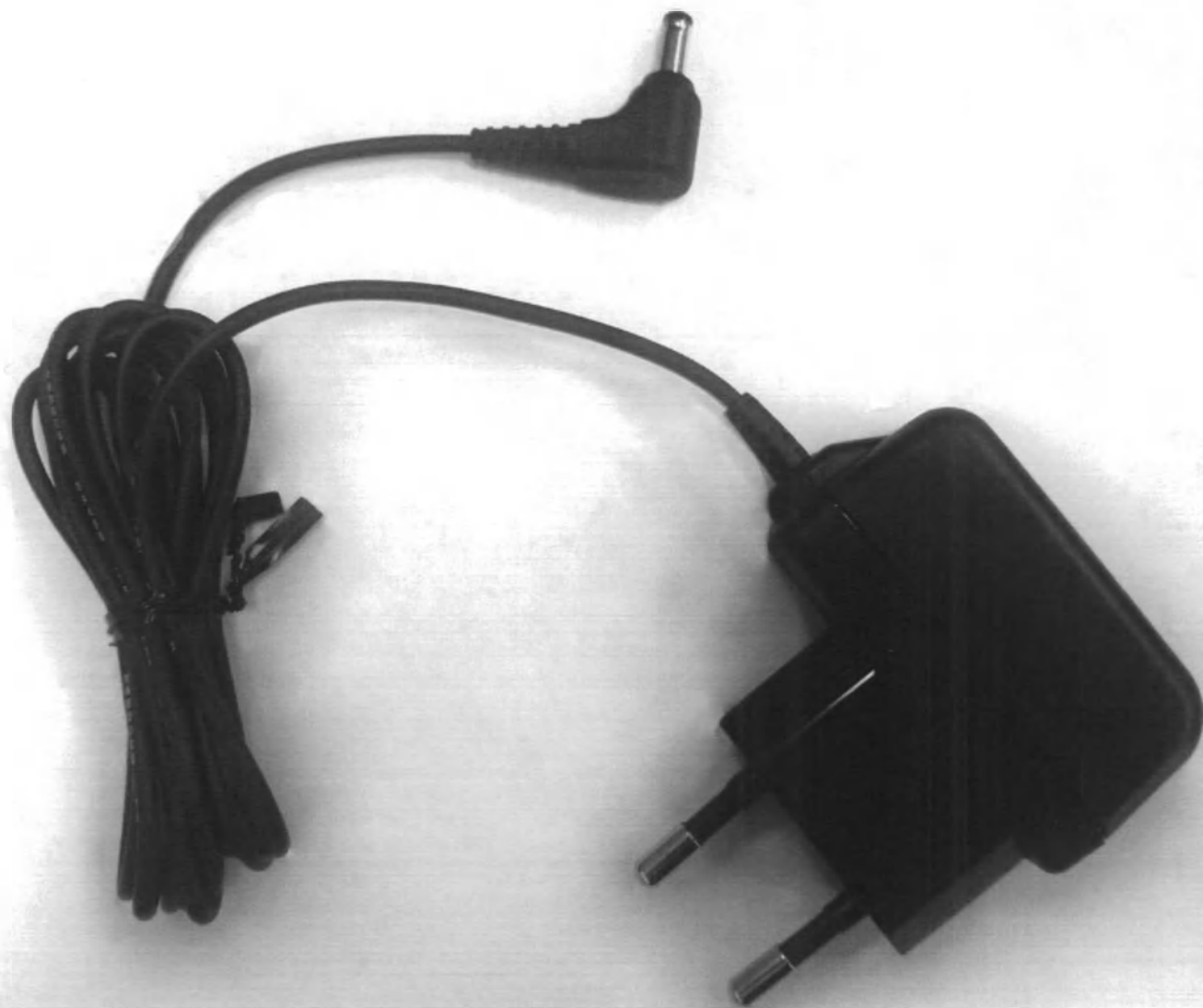



6. Комплект элементов питания

7. Журнал для записи артериального давления

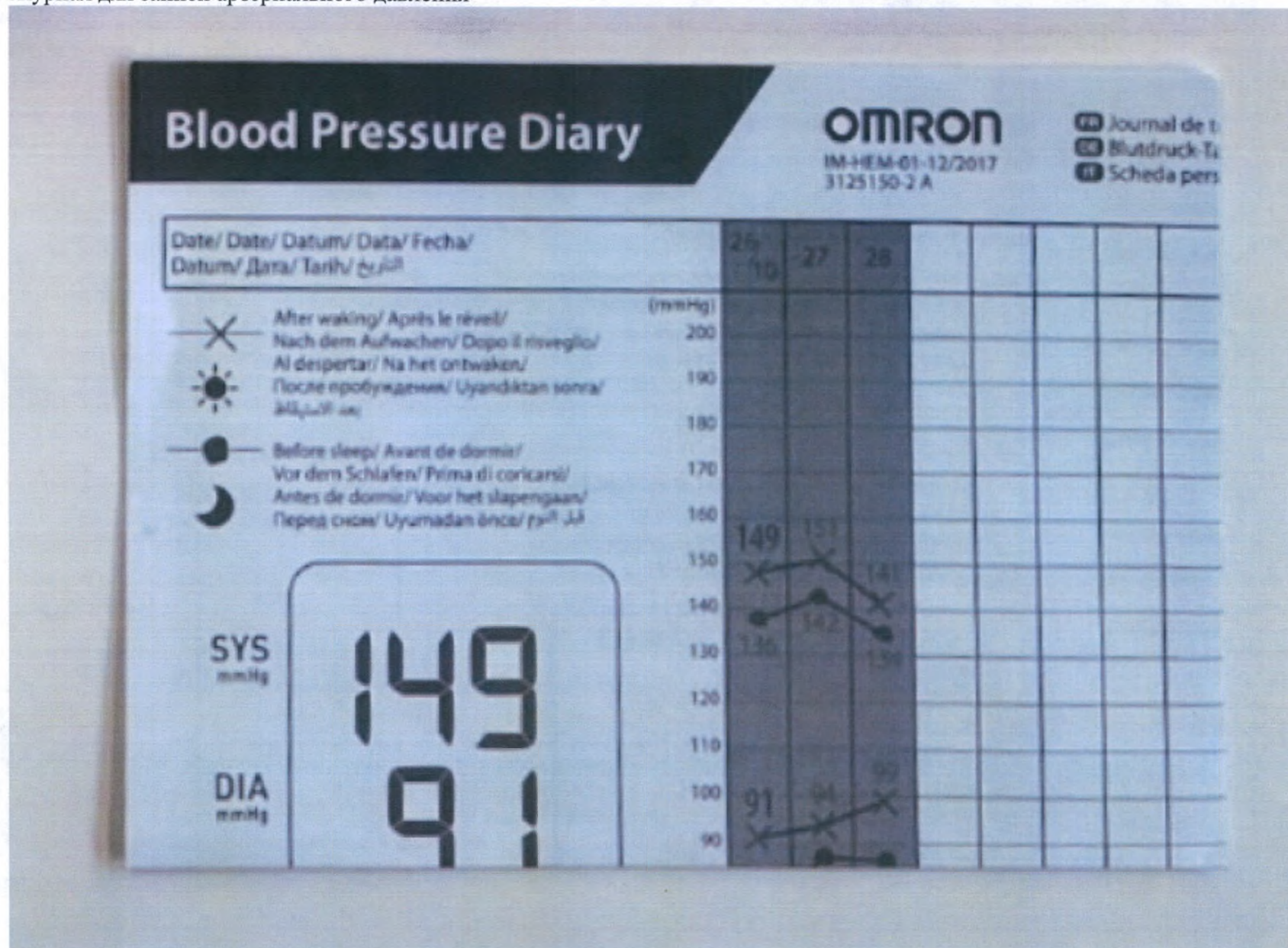

OMRON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Измеритель
артериального давления
и частоты пульса
торговой марки OMRON**



Уважаемый покупатель!

АО «КомплектСервис», уполномоченный представитель производителя, эксклюзивный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации, благодарит Вас за покупку тонометра OMRON.

Высокое качество приборов OMRON и комфорт при использовании – это результат высоких технологий и внимательного отношения к отзывам и пожеланиям пользователей.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации прибора, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов OMRON по телефону

**бесплатной горячей линии по России
8-800-555-00-80**

или посетите наш интернет-сайт по адресу:
<http://www.csmedica.ru>

В случае неисправности прибора Вы можете получить информацию о ближайшем центре технического обслуживания, осуществляющем гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание продукции торговой марки OMRON, по телефону горячей линии.

All for Healthcare

GC-BPM-RU-05-09/2022
8800261-4E

2. Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M2 Basic (HEM-7121-RU), в комплектации

1. Электронный блок



2. Манжета компрессионная СМ



RU

OMRON

**Измеритель
артериального
давления и частоты
пульса автоматический**



**M2 Basic (HEM-7121-RU)
Руководство по эксплуатации**

IM-HEM-7121-RU-RU-06-06/2022
7999797-2F

Дата выпуска: 2022-07-28



Введение

Благодарим Вас за приобретение цифрового автоматического тонометра OMRON M2 Basic.

OMRON M2 Basic — это компактный, полностью автоматический измеритель артериального давления и частоты пульса, работающий на основе осциллометрического метода. Он легко и быстро измеряет артериальное давление и частоту пульса. Прибор использует усовершенствованную технологию «IntelliSense», которая обеспечивает комфортное для пациента нагнетание воздуха в манжету без предварительной установки требуемого уровня давления воздуха или его повторной накачки.

Назначение

Это устройство предназначено для измерения артериального давления и частоты пульса у людей с соответствующей данной манжете длиной окружности плеча и при условии выполнения инструкций в этом руководстве. Прибор определяет наличие нерегулярного сердцебиения во время измерения и отображает предупреждающий индикатор вместе с результатами измерения. Рекомендуется преимущественно для использования в домашних условиях.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и следуйте приведенным в нем инструкциям для обеспечения вашей безопасности. Сохраните его для получения необходимых сведений в будущем. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ относительно конкретных значений Вашего артериального давления.


4. Чехол для хранения прибора





5. Комплект элементов питания

6. Журнал для записи артериального давления

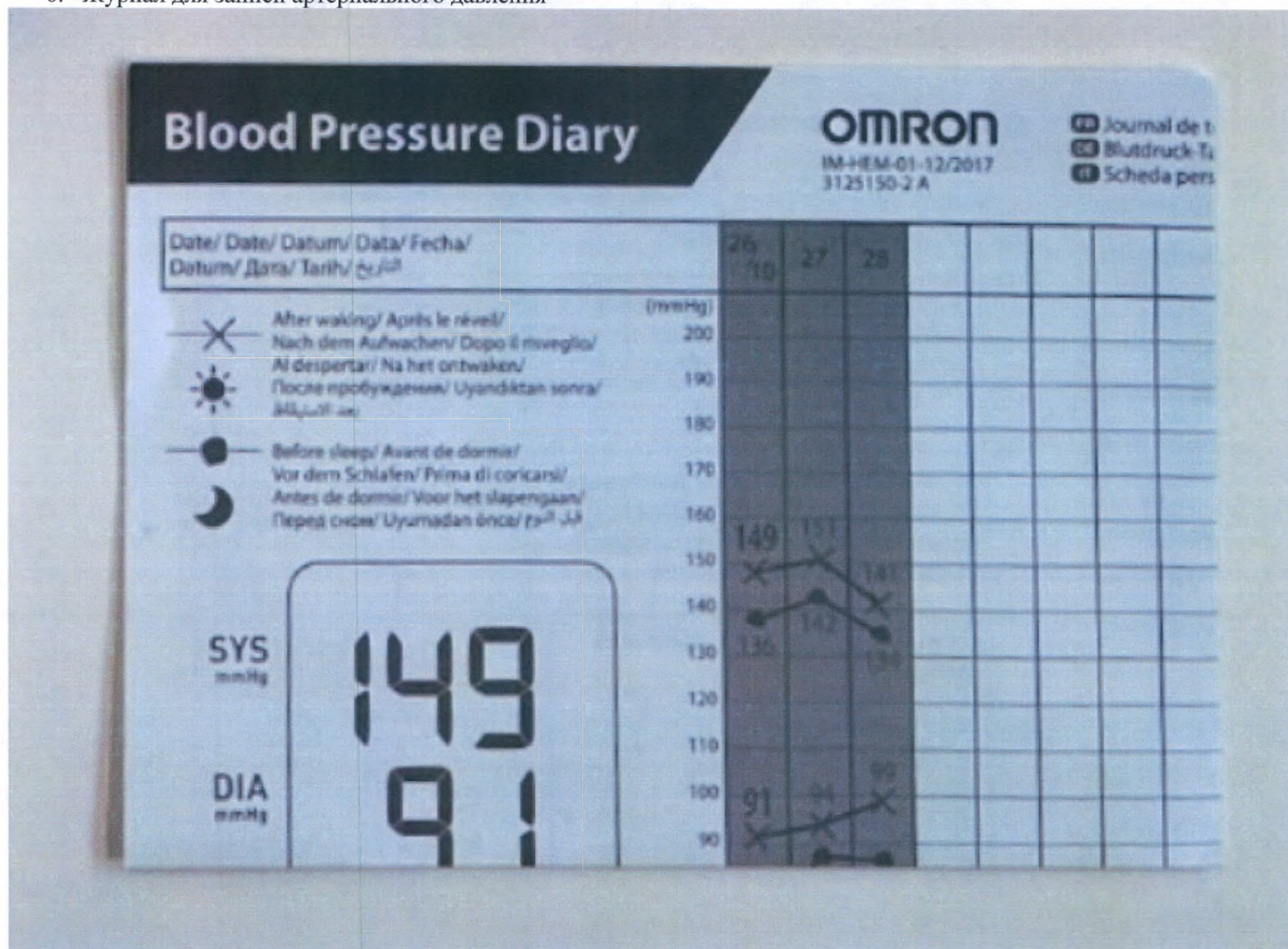

OMRON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Измеритель артериального давления и частоты пульса торговой марки OMRON



Уважаемый покупатель!

АО «КомплектСервис», уполномоченный представитель производителя, эксклюзивный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации, благодарит Вас за покупку тонометра OMRON.

Высокое качество приборов OMRON и комфорт при использовании – это результат высоких технологий и внимательного отношения к отзывам и пожеланиям пользователей.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации прибора, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов OMRON по телефону

бесплатной горячей линии по России
8-800-555-00-80

или посетите наш интернет-сайт по адресу:
<http://www.csmedica.ru>

В случае неисправности прибора Вы можете получить информацию о ближайшем центре технического обслуживания, осуществляющем гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание продукции торговой марки OMRON, по телефону горячей линии.

All for Healthcare

GC-BPM-RU-05-09/2022
8800261-4E

3. Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M2 Basic (HEM-7121-ARU), в комплектации

1. Электронный блок



2. Манжета компрессионная CM



3. Руководство по эксплуатации

RU

OMRON

**Измеритель
артериального
давления и частоты
пульса автоматический**

M2 Basic (HEM-7121-ARU)

Руководство по эксплуатации

IM-HEM-7121-ARU-RU-06-06/2022
7999796-4F
Дата выпуска: 2022-07-28



EAC 

Введение

Благодарим Вас за приобретение цифрового автоматического тонометра OMRON M2 Basic.

OMRON M2 Basic — это компактный, полностью автоматический измеритель артериального давления и частоты пульса, работающий на основе осциллометрического метода. Он легко и быстро измеряет артериальное давление и частоту пульса. Прибор использует усовершенствованную технологию «IntelliSense», которая обеспечивает комфортное для пациента нагнетание воздуха в манжету без предварительной установки требуемого уровня давления воздуха или его повторной накачки.

Назначение

Это устройство предназначено для измерения артериального давления и частоты пульса у людей с соответствующей данной манжете длиной окружности плеча и при условии выполнения инструкций в этом руководстве. Прибор определяет наличие нерегулярного сердцебиения во время измерения и отображает предупреждающий индикатор вместе с результатами измерения. Рекомендуется преимущественно для использования в домашних условиях.


Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и следуйте приведенным в нем инструкциям для обеспечения вашей безопасности. Сохраните его для получения необходимых сведений в будущем.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ относительно конкретных значений Вашего артериального давления.

4. Чехол для хранения прибора




5. Адаптер переменного тока AC ADAPTER-S (60240HW5SW)

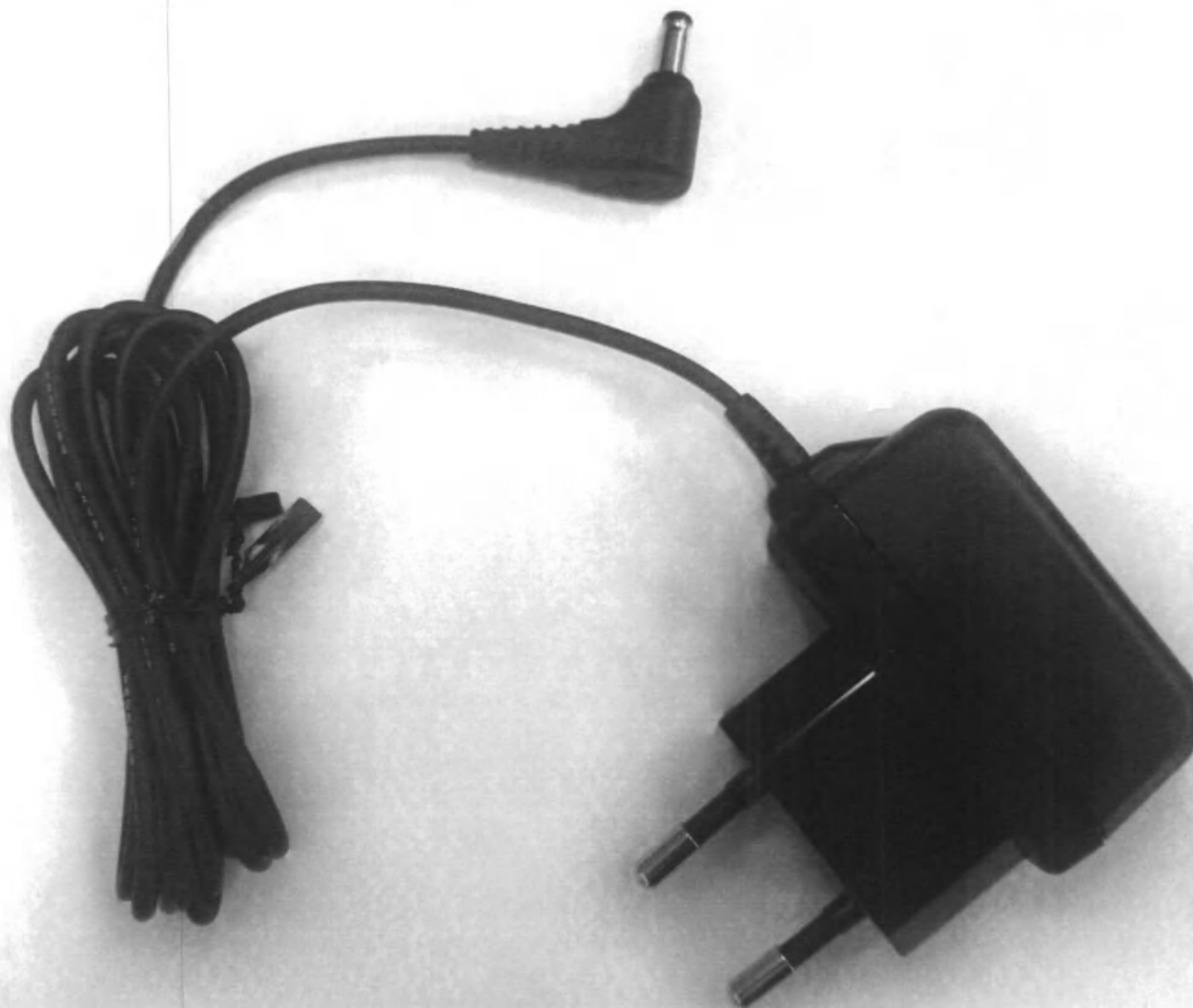



6. Комплект элементов питания

7. Журнал для записи артериального давления

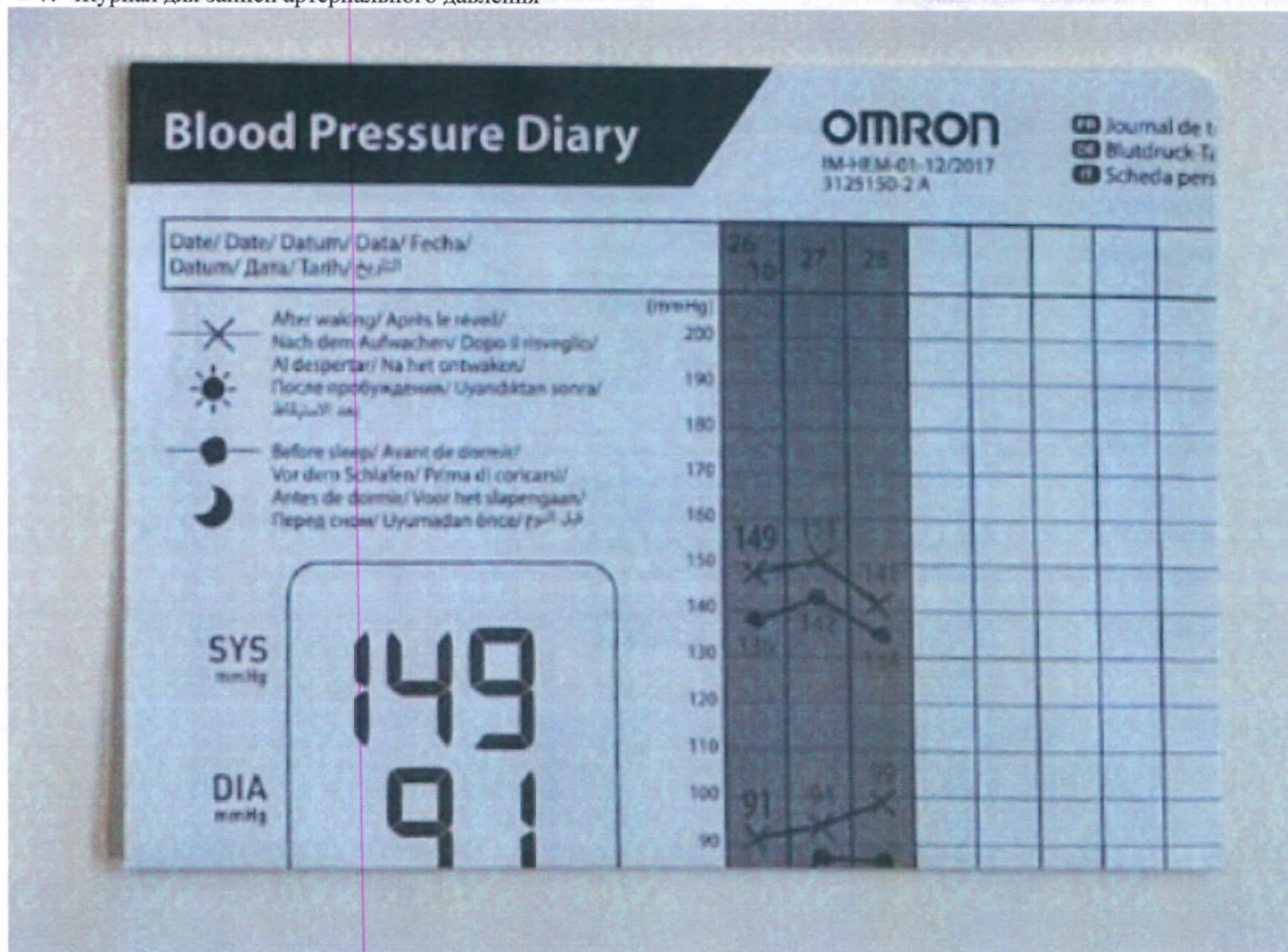

OMRON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Измеритель артериального давления и частоты пульса торговой марки OMRON



Уважаемый покупатель!

АО «КомплектСервис», уполномоченный представитель производителя, эксклюзивный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации, благодарит Вас за покупку тонометра OMRON.

Высокое качество приборов OMRON и комфорт при использовании – это результат высоких технологий и внимательного отношения к отзывам и пожеланиям пользователей.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации прибора, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов OMRON по телефону

бесплатной горячей линии по России
8-800-555-00-80

или посетите наш интернет-сайт по адресу:
<http://www.csmedica.ru>

В случае неисправности прибора Вы можете получить информацию о ближайшем центре технического обслуживания, осуществляющем гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание продукции торговой марки OMRON, по телефону горячей линии.

All for Healthcare

GC-BPM-RU-05-09/2022
8800261-4E

4. Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M2 Classic (HEM-7122-LRU), в комплектации

1. Электронный блок



2. Манжета компрессионная HEM-RML31



OMRON

**Измеритель
артериального
давления и частоты
пульса автоматический**



**M2 Classic (HEM-7122-LRU)
Руководство по эксплуатации**

IM-HEM-7122-LRU-RU-06-06/2022

7999794-8F

Дата выпуска: 2022-07-28



Введение

Благодарим Вас за приобретение цифрового автоматического тонометра OMRON M2 Classic.

OMRON M2 Classic — это компактный, полностью автоматический измеритель артериального давления и частоты пульса, работающий на основе осциллометрического метода. Он легко и быстро измеряет артериальное давление и частоту пульса. Прибор использует усовершенствованную технологию «IntelliSense», которая обеспечивает комфортное для пациента нагнетание воздуха в манжету без предварительной установки требуемого уровня давления воздуха или его повторной накачки.

Назначение

Это устройство предназначено для измерения артериального давления и частоты пульса у людей с соответствующей данной манжете длиной окружности плеча и при условии выполнения инструкций в этом руководстве. Прибор определяет наличие нерегулярного сердцебиения во время измерения и отображает предупреждающий индикатор вместе с результатами измерения. Рекомендуется преимущественно для использования в домашних условиях.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и следуйте приведенным в нем инструкциям для обеспечения вашей безопасности. Сохраните его для получения необходимых сведений в будущем. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ относительно конкретных значений Вашего артериального давления.


4. Чехол для хранения прибора



5. Комплект элементов питания



6. Журнал для записи артериального давления

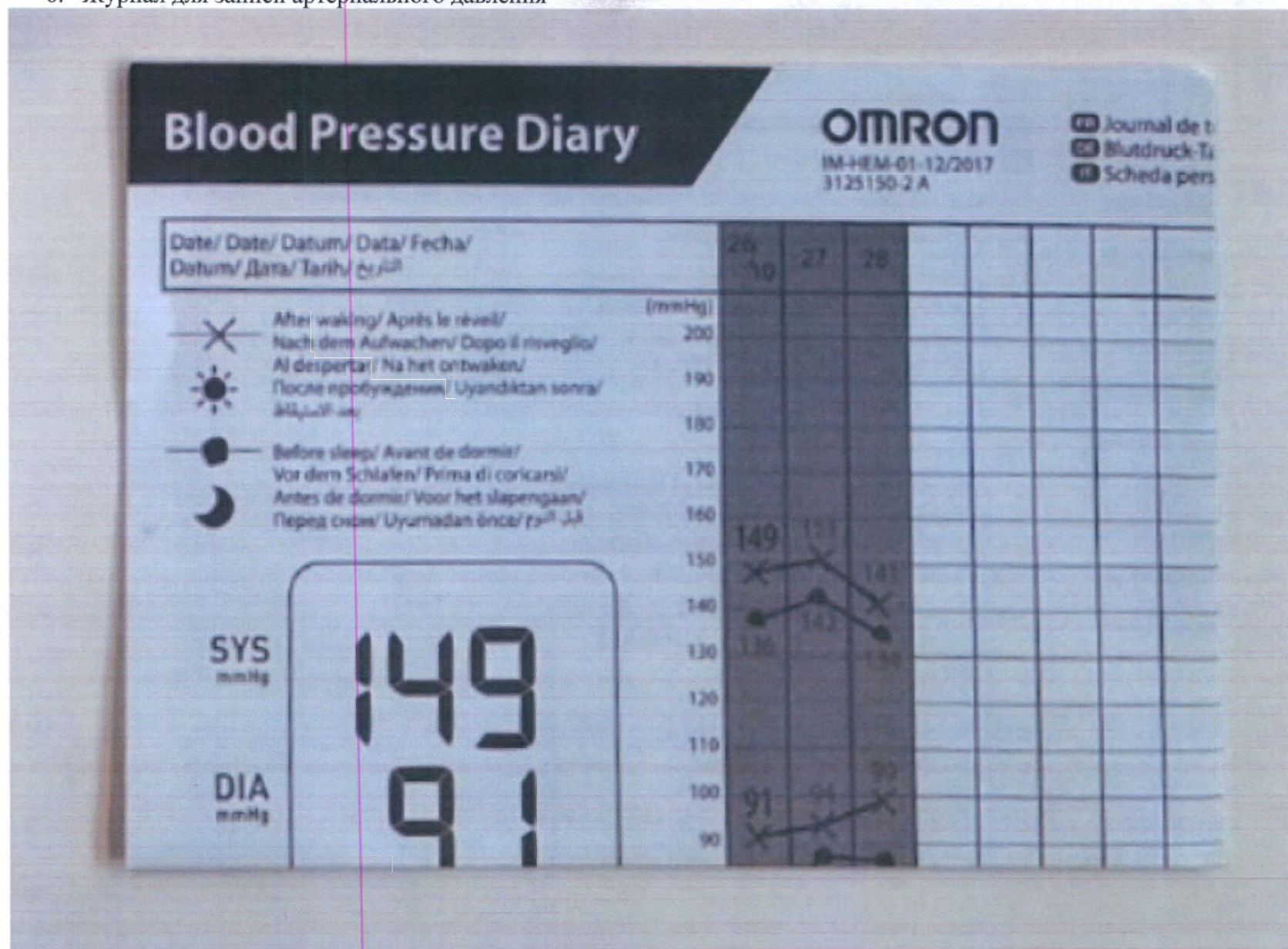

OMRON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Измеритель
артериального давления
и частоты пульса
торговой марки OMRON**



Уважаемый покупатель!

АО «КомплектСервис», уполномоченный представитель производителя, эксклюзивный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации, благодарит Вас за покупку тонометра OMRON.

Высокое качество приборов OMRON и комфорт при использовании – это результат высоких технологий и внимательного отношения к отзывам и пожеланиям пользователей.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации прибора, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов OMRON по телефону

**бесплатной горячей линии по России
8-800-555-00-80**

или посетите наш интернет-сайт по адресу:
<http://www.csmedica.ru>

В случае неисправности прибора Вы можете получить информацию о ближайшем центре технического обслуживания, осуществляющем гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание продукции торговой марки OMRON, по телефону горячей линии.

All for Healthcare

GC-BPM-RU-05-09/2022
8800261-4E

5. Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M2 Classic (HEM-7122-ALRU), в комплектации

1. Электронный блок



2. Манжета компрессионная HEM-RML31



OMRON

**Измеритель
артериального давления
и частоты пульса
автоматический**



**M2 Classic (HEM-7122-ALRU)
Руководство по эксплуатации**

IM-HEM-7122-ALRU-RU-06-06/2022

7999793-0F

Дата выпуска: 2022-07-28



Введение

Благодарим Вас за приобретение цифрового автоматического тонометра OMRON M2 Classic.

OMRON M2 Classic — это компактный, полностью автоматический измеритель артериального давления и частоты пульса, работающий на основе осциллометрического метода. Он легко и быстро измеряет артериальное давление и частоту пульса. Прибор использует усовершенствованную технологию «IntelliSense», которая обеспечивает комфортное для пациента нагнетание воздуха в манжету без предварительной установки требуемого уровня давления воздуха или его повторной накачки.

Назначение

Это устройство предназначено для измерения артериального давления и частоты пульса у людей с соответствующей данной манжете длиной окружности плеча и при условии выполнения инструкций в этом руководстве. Прибор определяет наличие нерегулярного сердцебиения во время измерения и отображает предупреждающий индикатор вместе с результатами измерения. Рекомендуется преимущественно для использования в домашних условиях.


Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и следуйте приведенным в нем инструкциям для обеспечения вашей безопасности. Сохраните его для получения необходимых сведений в будущем.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ относительно конкретных значений Вашего артериального давления.

4. Чехол для хранения прибора




5. Адаптер переменного тока AC ADAPTER-S (60240HW5SW)

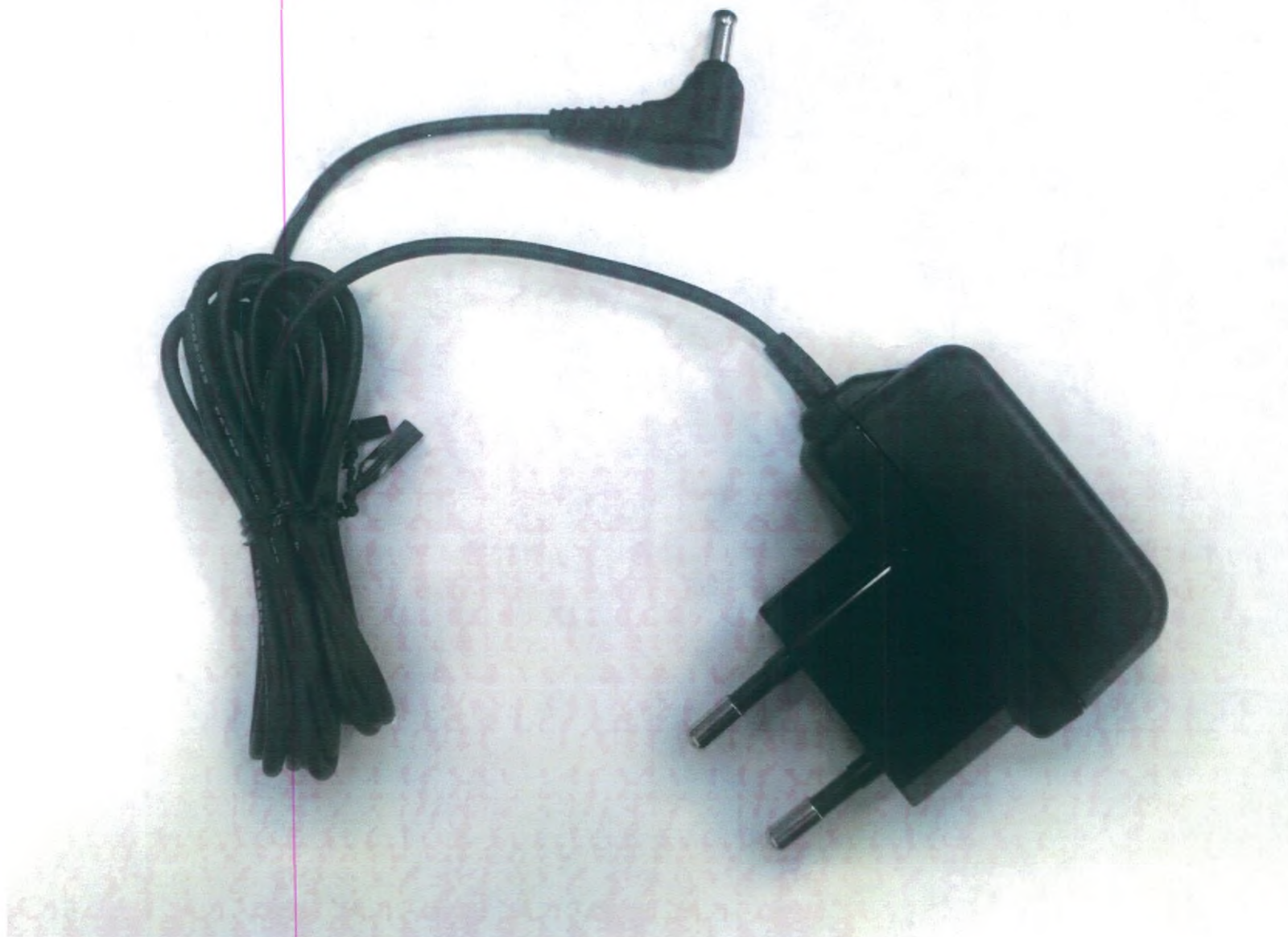



6. Комплект элементов питания

7. Журнал для записи артериального давления

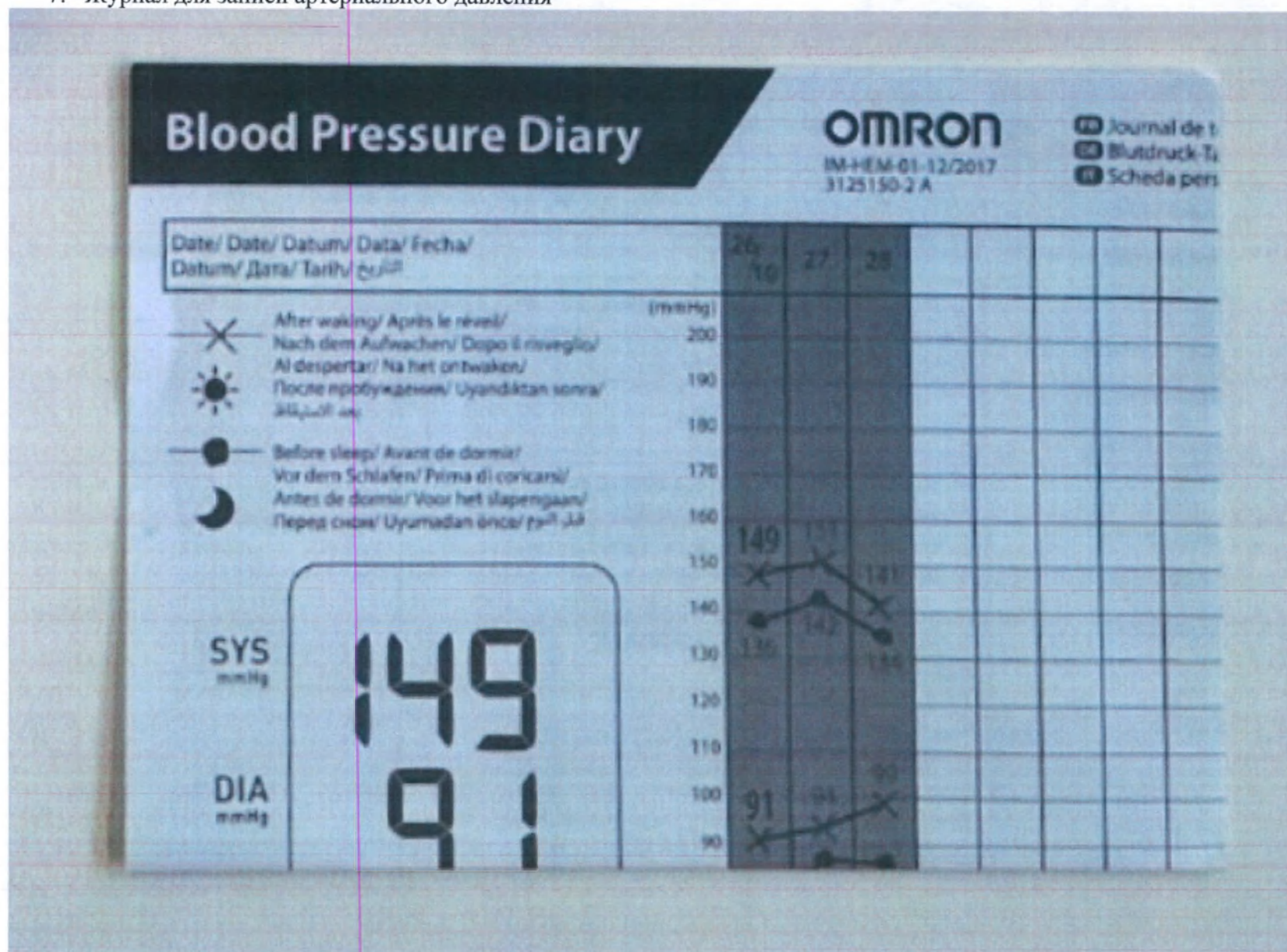

OMRON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Измеритель
артериального давления
и частоты пульса
торговой марки OMRON**



Уважаемый покупатель!

АО «КомплектСервис», уполномоченный представитель производителя, эксклюзивный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации, благодарит Вас за покупку тонометра OMRON.

Высокое качество приборов OMRON и комфорт при использовании — это результат высоких технологий и внимательного отношения к отзывам и пожеланиям пользователей.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации прибора, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов OMRON по телефону

**бесплатной горячей линии по России
8-800-555-00-80**

или посетите наш интернет-сайт по адресу:
<http://www.csmedica.ru>

В случае неисправности прибора Вы можете получить информацию о ближайшем центре технического обслуживания, осуществляющем гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание продукции торговой марки OMRON, по телефону горячей линии.

All for Healthcare

GC-BPM-RU-05-09/2022
8800261-4E

6. Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M3 Eco (HEM-7131-ARU) в комплектации

1. Электронный блок




2. Манжета компрессионная CM



IM-HEM-7131-ARU

OMRON

Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический

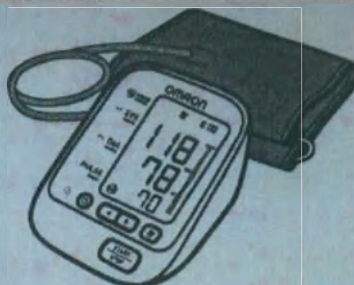

M3 Eco (HEM-7131-ARU)
Руководство по эксплуатации

IM-HEM-7131-ARU-RU-06-06/2022
7999793-0F

EAC



Введение

Благодарим Вас за приобретение цифрового автоматического тонометра OMRON M3 Eco.

OMRON M3 Eco — это компактный, полностью автоматический измеритель артериального давления и частоты пульса, работающий на основе осциллометрического метода. Он легко и быстро измеряет артериальное давление и частоту пульса. Прибор использует усовершенствованную технологию «IntelliSense», которая обеспечивает комфортное для пациента нагнетание воздуха в манжету без предварительной установки требуемого уровня давления воздуха или его повторной накачки.

Назначение


Это устройство предназначено для измерения артериального давления и частоты пульса у людей с соответствующей данной манжете длиной окружности плеча и при условии выполнения инструкций в этом руководстве. Прибор определяет наличие нерегулярного сердцебиения во время измерения и отображает предупреждающий индикатор вместе с результатами измерения. Рекомендуется преимущественно для использования в домашних условиях.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и следуйте приведенным в нем инструкциям для обеспечения вашей безопасности. Сохраните его для получения необходимых сведений в будущем. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ относительно конкретных значений Вашего артериального давления.

4. Чехол для хранения прибора




5. Адаптер переменного тока AC ADAPTER-S (60240HW5SW)

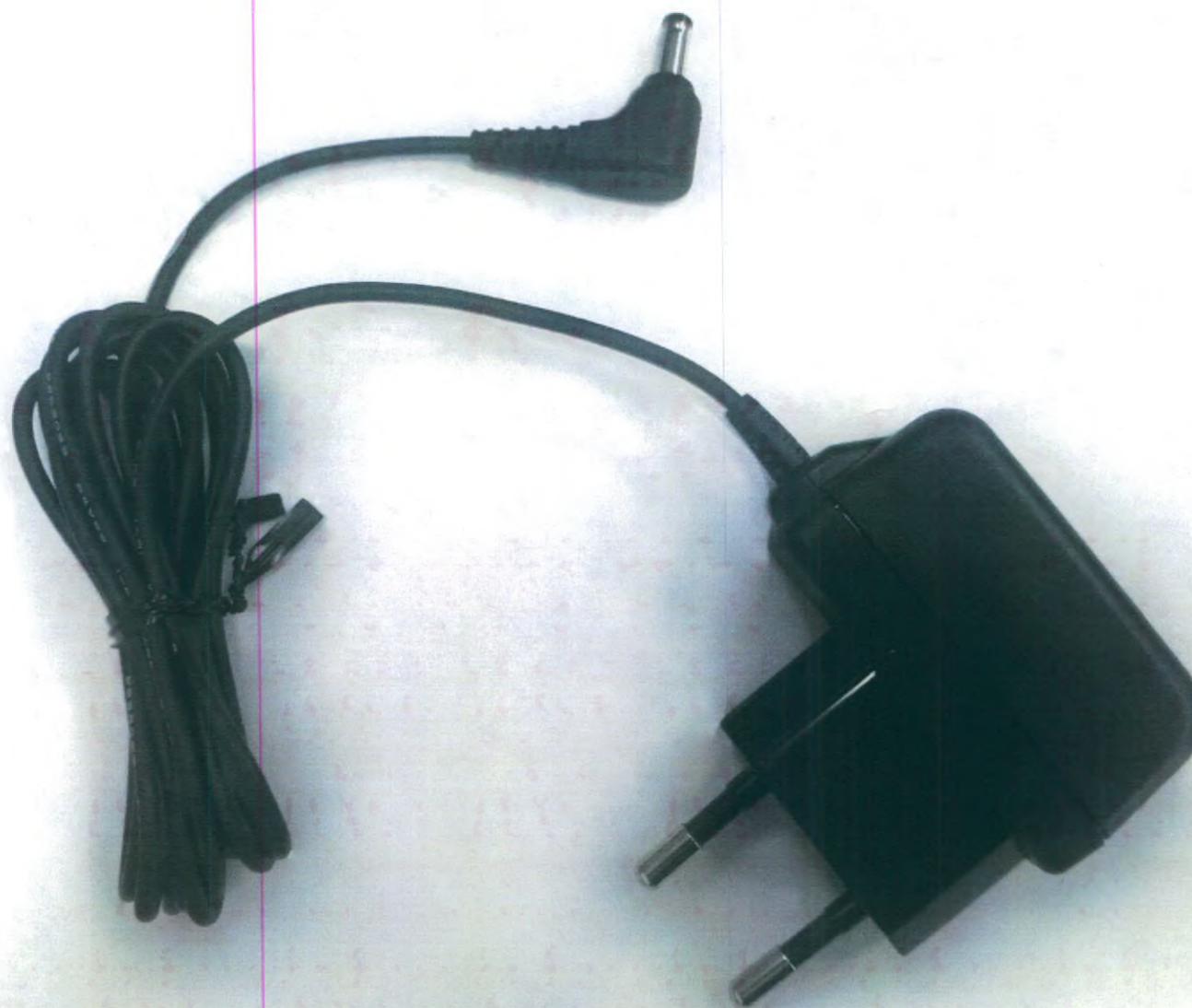

6. Комплект элементов питания



7. Журнал для записи артериального давления

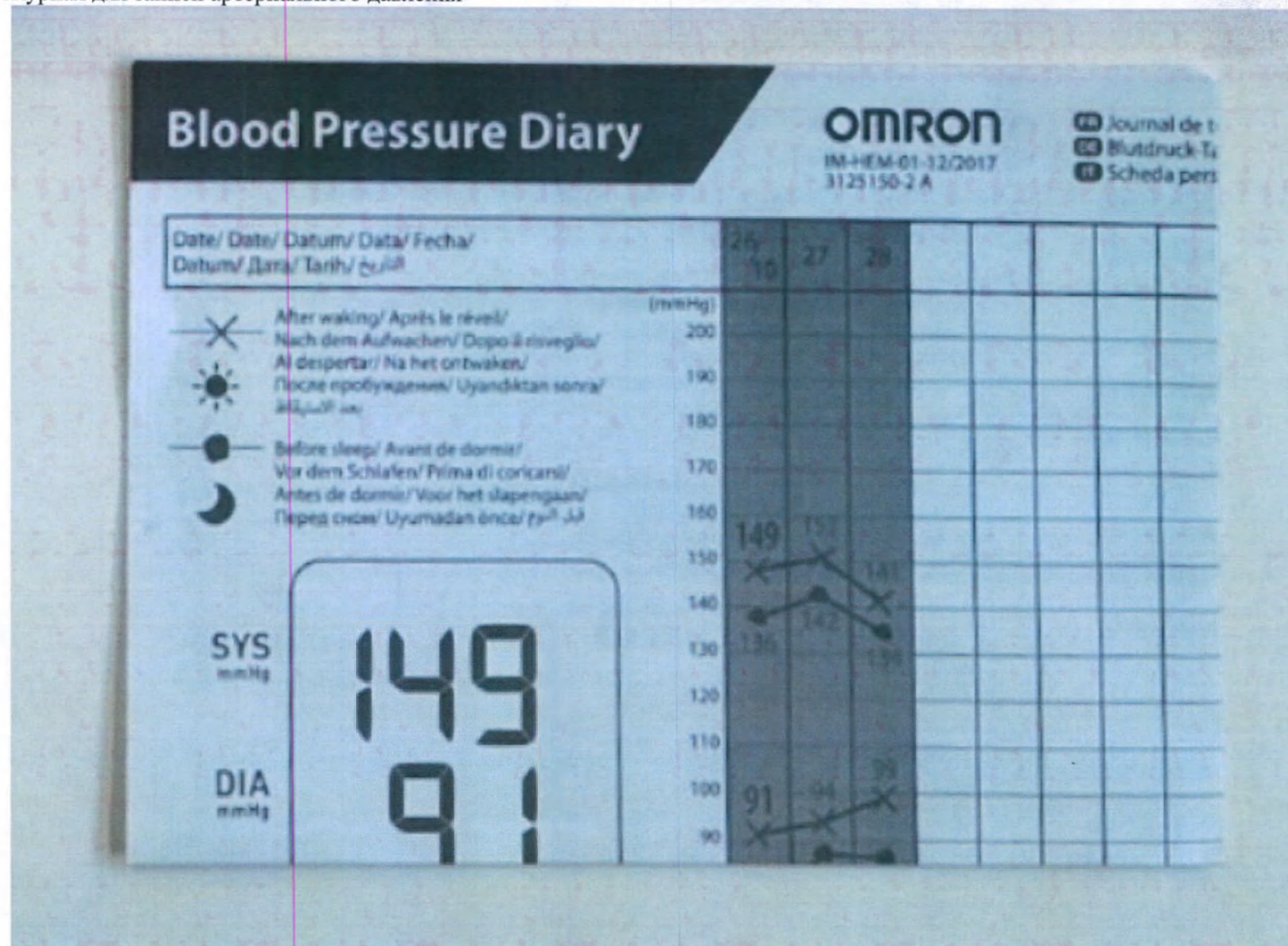

OMRON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Измеритель артериального давления и частоты пульса торговой марки OMRON



Уважаемый покупатель!

АО «КомплектСервис», уполномоченный представитель производителя, эксклюзивный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации, благодарит Вас за покупку тонометра OMRON.

Высокое качество приборов OMRON и комфорт при использовании – это результат высоких технологий и внимательного отношения к отзывам и пожеланиям пользователей.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации прибора, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов OMRON по телефону

бесплатной горячей линии по России
8-800-555-00-80

или посетите наш интернет-сайт по адресу:
<http://www.csmedica.ru>

В случае неисправности прибора Вы можете получить информацию о ближайшем центре технического обслуживания, осуществляющем гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание продукции торговой марки OMRON, по телефону горячей линии.

All for Healthcare

GC-BPM-RU-05-09/2022
8800261-4E

7. Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M3 Expert (HEM-7132-ALRU) в комплектации

1. Электронный блок



2. Манжета компрессионная HEM-RML31



OMRON

**Измеритель
артериального
давления и частоты
пульса автоматический**



**M3 Expert (HEM-7132-ALRU)
Руководство по эксплуатации**

IM-HEM-7132-ALRU-RU-06-06/2022
7999794-8F

Дата выпуска: 2022-07-28



Введение

Благодарим Вас за приобретение цифрового автоматического тонометра OMRON M3 Expert.

OMRON M3 Expert — это компактный, полностью автоматический измеритель артериального давления и частоты пульса, работающий на основе осциллометрического метода. Он легко и быстро измеряет артериальное давление и частоту пульса. Прибор использует усовершенствованную технологию «IntelliSense», которая обеспечивает комфортное для пациента нагнетание воздуха в манжету без предварительной установки требуемого уровня давления воздуха или его повторной накачки.

Назначение


Это устройство предназначено для измерения артериального давления и частоты пульса у людей с соответствующей данной манжете длиной окружности плеча и при условии выполнения инструкций в этом руководстве. Прибор определяет наличие нерегулярного сердцебиения во время измерения и отображает предупреждающий индикатор вместе с результатами измерения. Рекомендуется преимущественно для использования в домашних условиях.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и следуйте приведенным в нем инструкциям для обеспечения вашей безопасности. Сохраните его для получения необходимых сведений в будущем.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ относительно конкретных значений Вашего артериального давления.

4. Чехол для хранения прибора




5. Адаптер переменного тока AC ADAPTER-S (60240HW5SW)

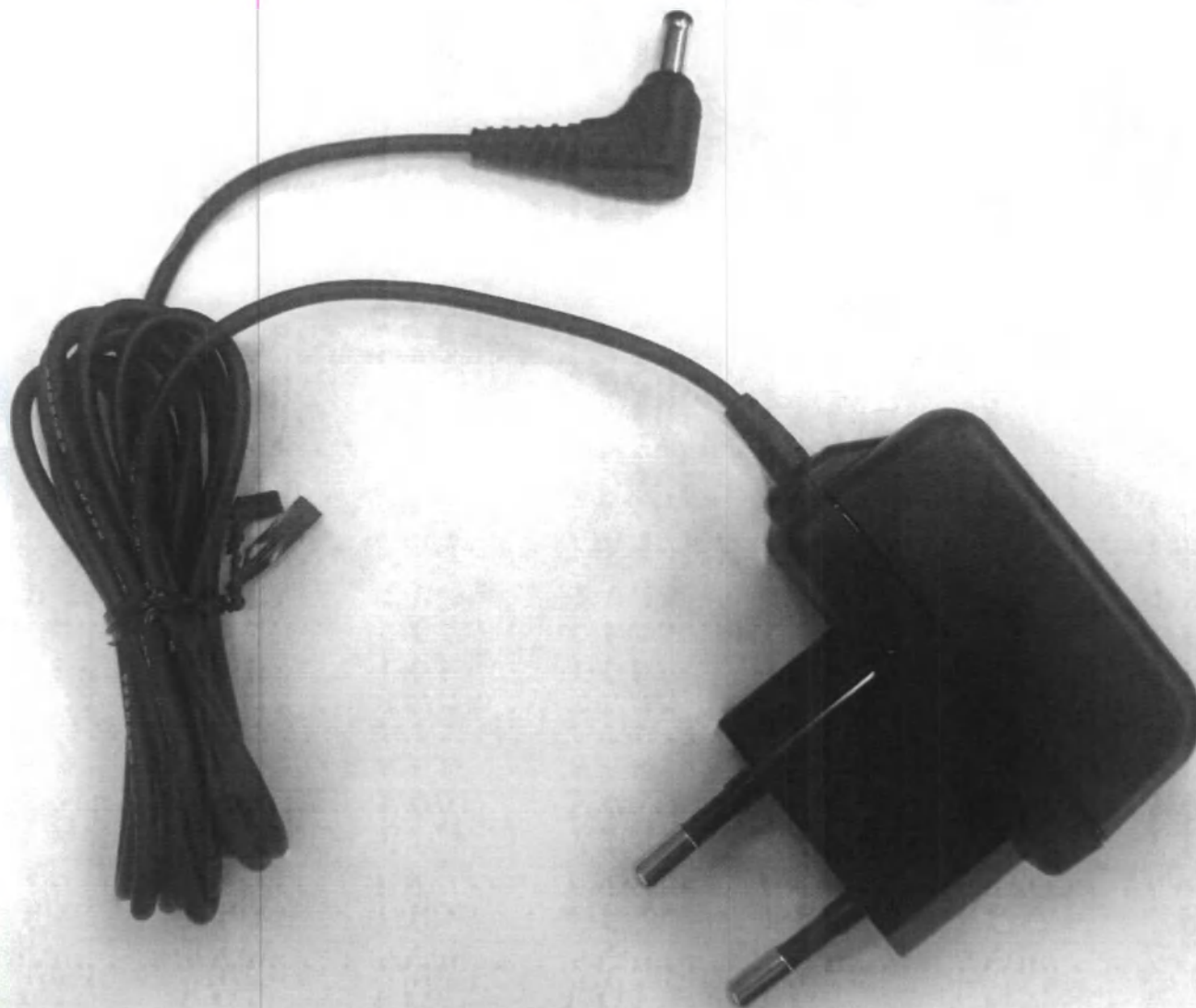

6. Комплект элементов питания



7. Журнал для записи артериального давления

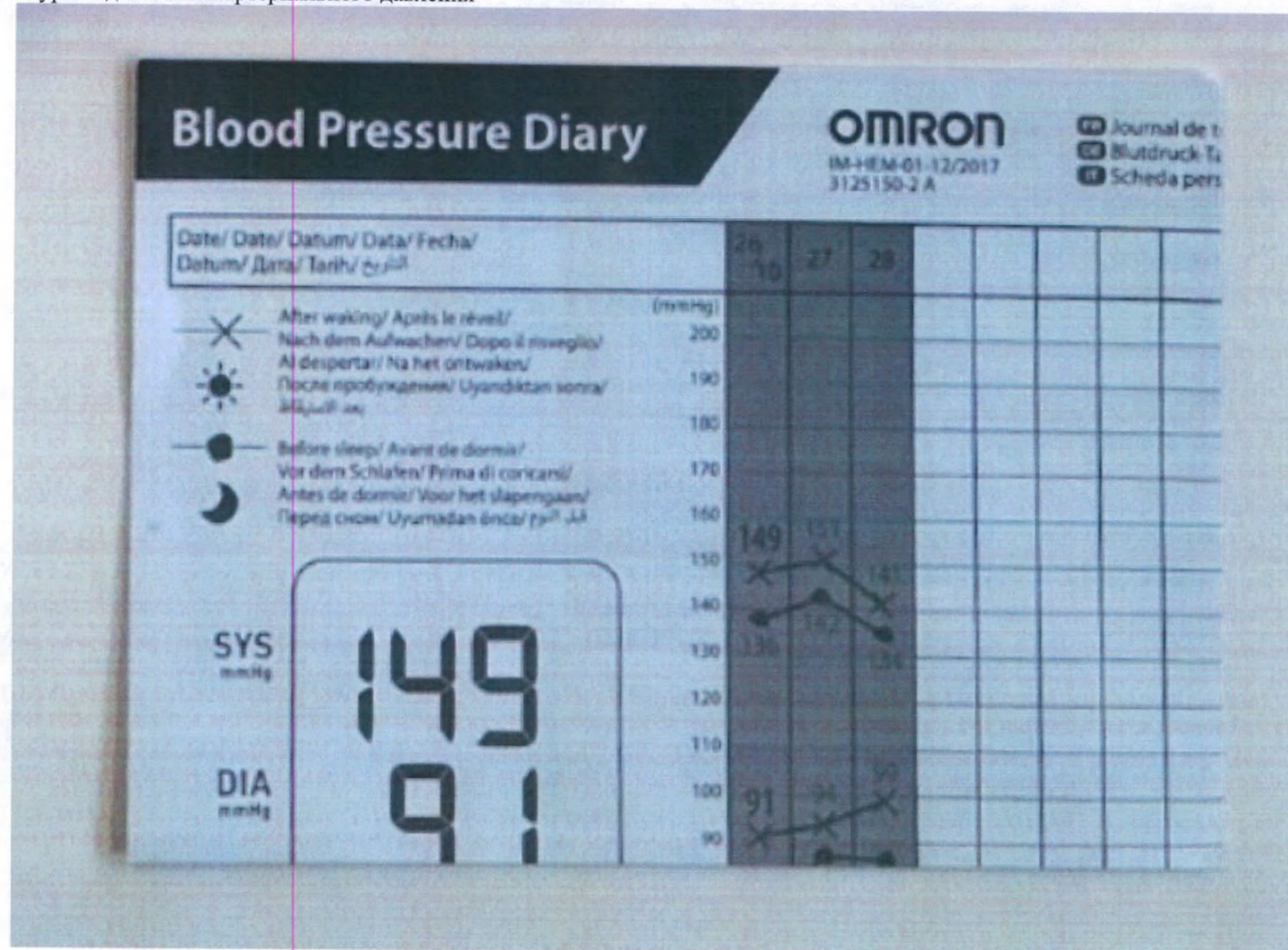

OMRON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Измеритель артериального давления и частоты пульса торговой марки OMRON



Уважаемый покупатель!

АО «КомплектСервис», уполномоченный представитель производителя, эксклюзивный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации, благодарит Вас за покупку тонометра OMRON.

Высокое качество приборов OMRON и комфорт при использовании – это результат высоких технологий и внимательного отношения к отзывам и пожеланиям пользователей.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации прибора, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов OMRON по телефону

**бесплатной горячей линии по России
8-800-555-00-80**

или посетите наш интернет-сайт по адресу:
<http://www.csmedica.ru>

В случае неисправности прибора Вы можете получить информацию о ближайшем центре технического обслуживания, осуществляющем гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание продукции торговой марки OMRON, по телефону горячей линии.

All for Healthcare

GC-BPM-RU-05-09/2022
8800261-4E

8. Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M3 Family (HEM-7133-ALRU), в комплектации

1. Электронный блок



2. Манжета компрессионная HEM-RML31



CEN 2 RU

OMRON

**Измеритель
артериального
давления и частоты
пульса автоматический**



**M3 Family (HEM-7133-ALRU)
Руководство по эксплуатации**

IM-HEM-7133-ALRU-RU-06-06/2022
7999793-0F

EAC



Введение

Благодарим Вас за приобретение цифрового автоматического тонометра OMRON M3 Family.

OMRON M3 Family — это компактный, полностью автоматический измеритель артериального давления и частоты пульса, работающий на основе осциллометрического метода. Он легко и быстро измеряет артериальное давление и частоту пульса. Прибор использует усовершенствованную технологию «IntelliSense», которая обеспечивает комфортное для пациента нагнетание воздуха в манжету без предварительной установки требуемого уровня давления воздуха или его повторной накачки.

Назначение


Это устройство предназначено для измерения артериального давления и частоты пульса у людей с соответствующей данной манжете длиной окружности плеча и при условии выполнения инструкций в этом руководстве. Прибор определяет наличие нерегулярного сердцебиения во время измерения и отображает предупреждающий индикатор вместе с результатами измерения. Рекомендуется преимущественно для использования в домашних условиях.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и следуйте приведенным в нем инструкциям для обеспечения вашей безопасности. Сохраните его для получения необходимых сведений в будущем. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ относительно конкретных значений Вашего артериального давления.

4. Чехол для хранения прибора




5. Адаптер переменного тока AC ADAPTER-S (60240HW5SW)

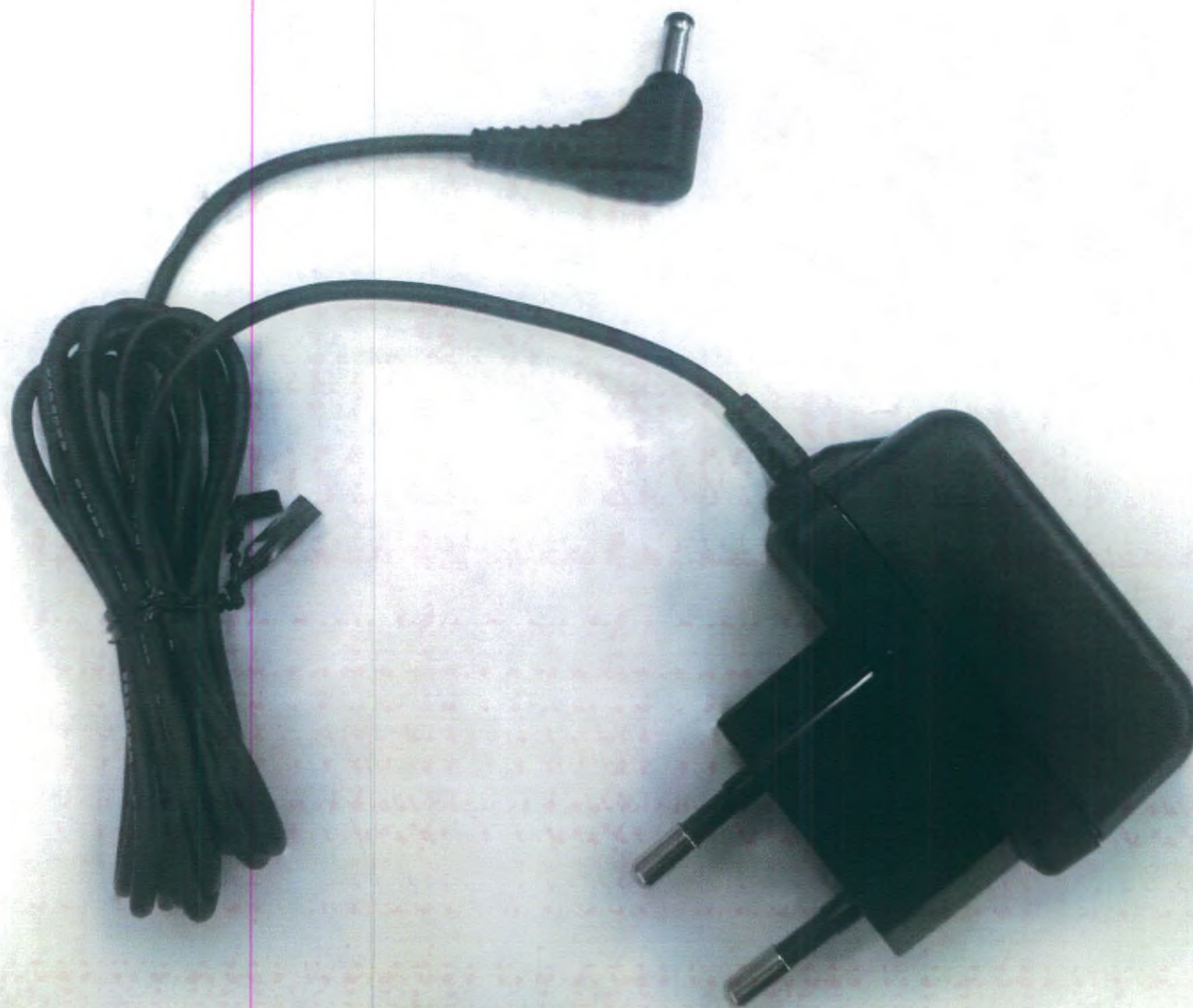



6. Комплект элементов питания

7. Журнал для записи артериального давления

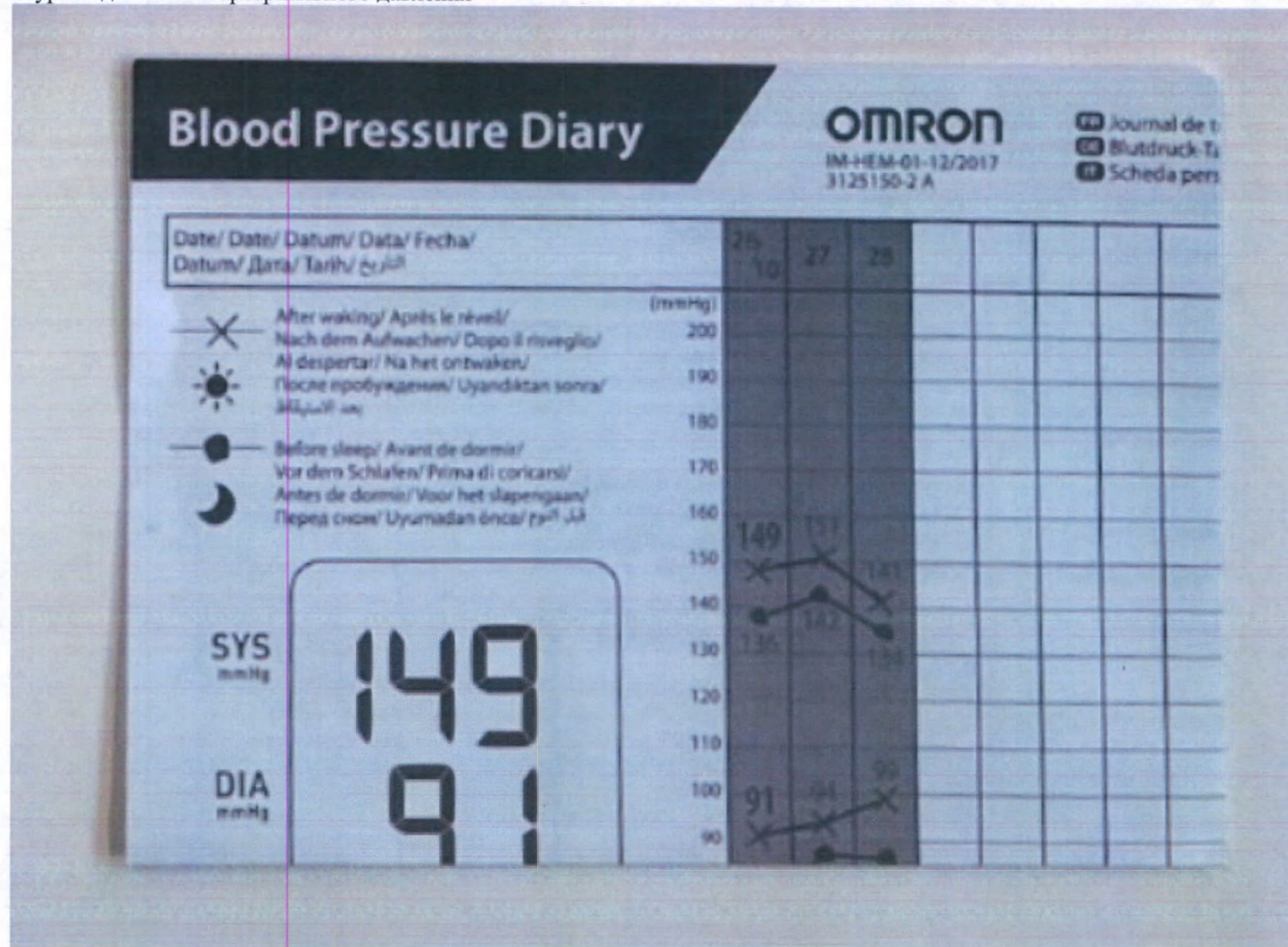

OMRON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Измеритель артериального давления и частоты пульса торговой марки OMRON



Уважаемый покупатель!

АО «КомплектСервис», уполномоченный представитель производителя, эксклюзивный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON на территории Российской Федерации, благодарит Вас за покупку тонометра OMRON.

Высокое качество приборов OMRON и комфорт при использовании — это результат высоких технологий и внимательного отношения к отзывам и пожеланиям пользователей.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации прибора, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов OMRON по телефону

бесплатной горячей линии по России
8-800-555-00-80

или посетите наш интернет-сайт по адресу:
<http://www.csmedica.ru>

В случае неисправности прибора Вы можете получить информацию о ближайшем центре технического обслуживания, осуществляющем гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание продукции торговой марки OMRON, по телефону горячей линии.

All for Healthcare

GC-BPM-RU-05-09/2022
8800261-4E

ПОДПИСАНО
65 ЛЮДИ

