

**ПОДТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
ООО «Миндрей Медикал Рус»  
Сюн Вэй.  
«22» июля 2024 г.  
По Доверенности  
31.07.24 г.  
Ян Си

**Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики  
in vitro**

Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах  
автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии  
EU в вариантах исполнения

**Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус»**  
129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский,  
пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11А.  
Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39  
ИНН 7705815069 КПП 770201001

Тест-полоски для исследованию компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU, в вариантах исполнения

Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU, в вариантах исполнения:

1. Тест-полоска для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 11 параметров URS-11MRQ:

- Тест-полоска, 100 шт. - 1 уп.,  
- Инструкция по применению - 1 шт.

2. Тест-полоска для исследования компонентов мочи на анализаторах



Рисунок 1. Общий вид варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 11 параметров URS-11MRQ

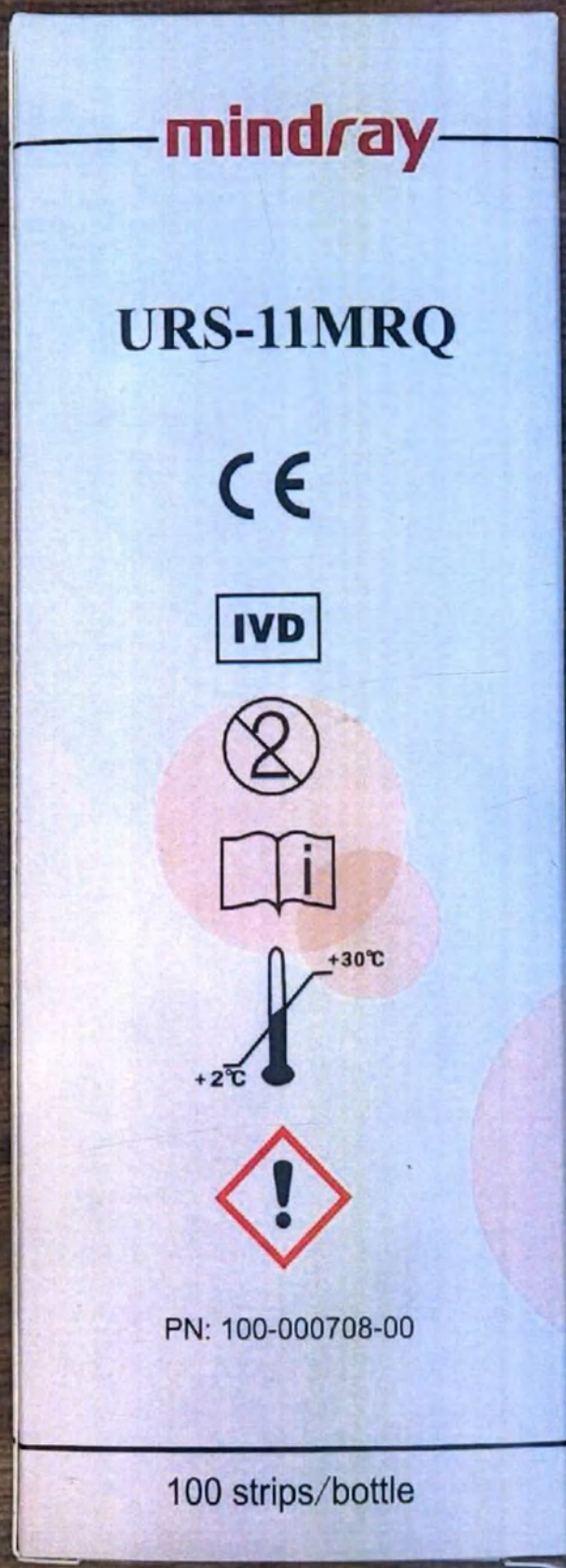


Рисунок 2. Внешняя (потребительская) упаковка варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 11 параметров URS-11MRQ (вид 1)

# URS-11MRQ

## Reagent Strips for Urinalysis

### Important:


- ◆ Store only in original bottle;
- ◆ Do not remove desiccant(s);
- ◆ Do not remove strip from the bottle until immediately before it is to be used for testing;
- ◆ Replace cap immediately and tightly after removing reagent strip;
- ◆ Store at temperature between 2-30°C;
- ◆ Do not store the bottle in direct sunlight;
- ◆ Do not store in a refrigerator;
- ◆ Do not use after expiry date;
- ◆ Do not touch test areas of reagent strips.



Jilin Leading Bio-engineering Co., Ltd.  
Address: 899 Yueda Road, New & High Tech.  
Development Zone, Changchun, Jilin, P.R. China  
TEL : +86-431-81157499  
E-mail: info@clini-lab.com  
<https://www.clini-lab.com>

100 strips/bottle

Рисунок 3. Внешняя (потребительская) упаковка варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 11 параметров URS-11MRQ (вид 2)

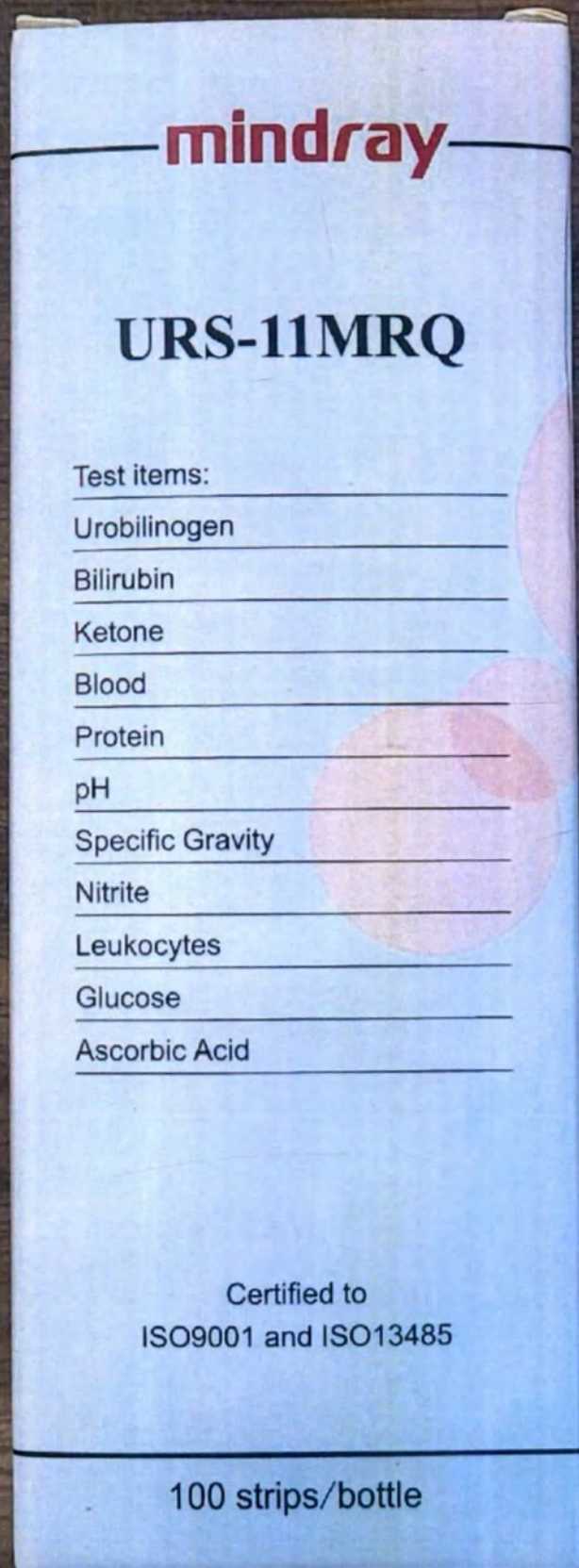

*Рисунок 4. Внешняя (потребительская) упаковка варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 11 параметров URS-11MRQ (вид 3)*

# URS-11MRQ


## Reagent Strips for Urinalysis

### Ingredients:

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <b>Urobilinogen</b>                          |          |
| fast blue B                                  | 0.3%w/w  |
| <b>Bilirubin</b>                             |          |
| 2,4-Dichloroaniline diazonium salt           | 0.6%w/w  |
| <b>Ketone</b>                                |          |
| sodium nitroprusside                         | 5.9%w/w  |
| <b>Blood</b>                                 |          |
| diisopropylbenzene dihydroperoxide           | 26%w/w   |
| 3,3',5,5'- tetramethylbenzidine              | 1.6%w/w  |
| <b>Protein</b>                               |          |
| tetrabromophenol blue                        | 0.2%w/w  |
| <b>pH</b>                                    |          |
| methyl red                                   | 3.6%w/w  |
| bromothymol blue                             | 55.1%w/w |
| <b>Specific Gravity</b>                      |          |
| bromothymol blue                             | 4.8%w/w  |
| methyl vinyl ether and maleic acid copolymer | 90.6%w/w |
| <b>Nitrite</b>                               |          |
| p-arsanilic acid                             | 1.4%w/w  |
| 1,2,3,4-tetrahydrobenzo(h)quinolin- 3-ol     | 0.9%w/w  |
| <b>Leukocytes</b>                            |          |
| pyrrole amino acid ester                     | 4.3%w/w  |
| diazonium salt                               | 0.5%w/w  |
| <b>Glucose</b>                               |          |
| glucose oxidase                              | 1.8%w/w  |
| peroxidase                                   | 0.4%w/w  |
| potassium iodide                             | 0.3%w/w  |
| <b>Ascorbic Acid</b>                         |          |
| 2,6-dichlorophenol indophenol sodium         | 1.0%w/w  |

100 strips/bottle

Рисунок 5. Внешняя (потребительская) упаковка варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 11 параметров URS-11MRQ (вид 4)

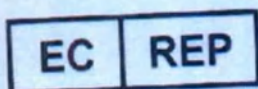

Company: SUNGO Europe B.V.  
Address: Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,  
2909VA Capelle aan den IJssel,  
The Netherlands

Рисунок 6. Внешняя (потребительская) упаковка варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 11 параметров URS-11MRQ (вид 5)

# URS-11MRQ

## Reagent Strips for Urinalysis

REF 18149

LOT 2023051001

20250509

Рисунок 7. Внешняя (потребительская) упаковка варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 11 параметров URS-11MRQ (вид 6)



Рисунок 8. Внутренняя упаковка (флакон) варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 11 параметров URS-11MRQ (вид 1)



Рисунок 9. Внутренняя упаковка (флакон) варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 11 параметров URS-11MRQ (вид 2)



Рисунок 10. Внутренняя упаковка (флакон) варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 11 параметров URS-11MRQ (вид 3)



Рисунок 11. Внутренняя упаковка (флакон) варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 11 параметров URS-11MRQ (вид 4)



Рисунок 12. Внутренняя упаковка (флакон) варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 11 параметров URS-11MRQ (вид 5)



*Рисунок 13. Крышка-платинка флакона варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 11 параметров URS-11MRQ*



Рисунок 14. Тест-полоска варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 11 параметров URS-11MRQ

**Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU, в вариантах исполнения**

**[Наименование медицинского изделия]**

Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU, в вариантах исполнения.

**Варианты исполнения:**

Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU, в вариантах исполнения:

1. Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 11 параметров URS-11MRQ:

- Тест-полоски, 100 шт. – 1 уп.;

- Инструкция по применению – 1 шт.

2. Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 14 параметров URS-14MRQ:

- Тест-полоски, 100 шт. – 1 уп.;

- Инструкция по применению – 1 шт.

**[Спецификация упаковки]**

100 полосок/флакон

**[Назначение]**

Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU в вариантах исполнения для диагностики *in vitro*, предназначены для однократного применения, для определения патологических состояний организма человека для качественного определения компонентов мочи, включая нитриты (NIT), цветность и мутность, полуколичественного определения компонентов мочи, включая лейкоциты (LEU), уробилиноген (URO), белок (PRO), билирубин (BIL), глюкозу (GLU), аскорбиновую кислоту (VitC), кетоны (KET), кровь (BLD), креатинин (CRE), микроальбумин (mALB), кальций (Ca), pH и количественного определения удельной плотности (SG) методом отражательной фотометрии.

**[Область применения]**

Клиническая лабораторная диагностика.

**[Функциональное назначение (например, скрининг, мониторинг, диагностика или вспомогательное средство в диагностике)]**

Для диагностики *in vitro*.

Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU, в вариантах исполнения предназначены для использования вместе с анализаторами автоматическими серии UA и станциями анализа мочи автоматическими серии EU

**[Специфическая патология, состояние или фактор риска, для обнаружения, определения или дифференцирования которого предназначено медицинское изделие для диагностики *in vitro*]**

Метод исследования компонентов мочи по принципу сухой химии с помощью тест-полосок играет важную роль в клинической диагностике и дифференциации системных заболеваний, в диагностике, оценке прогрессирования и прогнозировании заболеваний системы мочевыводящих путей.

Измерение концентрации билирубина обладает высокой диагностической ценностью для заболеваний печени и желчевыводящих путей. Комбинация концентрации вещества из семейства билиногенов и билирубина может использоваться для диагностики желтухи.

Кетонурия может возникать у пациентов с инфекционными заболеваниями и после общего наркоза. Гематурия часто встречается при воспалительной реакции мочевыводящих путей (острый нефрит, камни в почках, уретрит и т.д.), при различных отравлениях, ожогах, септицемии, малярии и других инфекциях. При воспалительной реакции мочевыводящих путей и урогенитального тракта в моче могут присутствовать лейкоциты.

Тест-полоски для анализа мочи на белок главным образом обнаруживают альбумин в моче. Протеинурия указывает на повышенную скорость клубочковой фильтрации, клубочковое и канальцевое повреждение нефронов.

В случае инфекции мочевыводящих путей и количестве бактерий в моче более 100000/мл анализ на нитриты дает положительный результат. Измерение удельной плотности мочи позволяет оценить концентрационную функцию почек, значение pH мочи варьируется в диапазоне 5,0-8,5. Микроальбумин является ранним маркером прогрессирующего клубочкового повреждения, диабетической нефропатии, сердечно-сосудистых заболеваний. Во время беременности

Рисунок 15. Инструкция по применению – 1 шт.

Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU, в вариантах исполнения [Наименование металлического изделия]

Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU, в вариантах исполнения.

Варианты исполнения:

Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU, в вариантах исполнения:

1. Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 11 параметров URS-11MRQ;

Тест-полоски, 100 шт. – 1 уп.

Инструкция по применению – 1 шт.

2. Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах



Рисунок 16 Общий вид варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 14 параметров URS-14MRQ



Рисунок 17 Внешняя (потребительская) упаковка варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 14 параметров URS-14MRQ (вид 1)

# URS-14MRQ

## Reagent Strips for Urinalysis

### Important:

- ◆ Store only in original bottle;
- ◆ Do not remove desiccant(s);
- ◆ Do not remove strip from the bottle until immediately before it is to be used for testing;
- ◆ Replace cap immediately and tightly after removing reagent strip;
- ◆ Store at temperature between 2-30°C;
- ◆ Do not store the bottle in direct sunlight;
- ◆ Do not store in a refrigerator;
- ◆ Do not use after expiry date;
- ◆ Do not touch test areas of reagent strips.



Jilin Leading Bio-engineering Co., Ltd.  
Address: 899 Yueda Road, New & High Tech.  
Development Zone, Changchun, Jilin, P.R. China  
TEL : +86-431-81157499  
E-mail: info@clini-lab.com  
<https://www.clini-lab.com>

100 strips/bottle

Рисунок 18 Внешняя (потребительская) упаковка варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 14 параметров URS-14MRQ (вид 2)

**mindray**

## URS-14MRQ

Test items:

Urobilinogen

Bilirubin

Ketone

Blood

Protein

pH

Specific Gravity

Nitrite

Leukocytes

Glucose

Ascorbic Acid

Urinary Calcium

Creatinine

Microalbumin

Certified to  
ISO9001 and ISO13485

100 strips/bottle

Рисунок 19 Внешняя (потребительская) упаковка варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 14 параметров URS-14MRQ (вид 3)

## URS-14MRQ

### Reagent Strips for Urinalysis

#### Ingredients:

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <b>Urobilinogen</b>                          |          |
| fast blue B                                  | 0.3%w/w  |
| <b>Bilirubin</b>                             |          |
| 2,4-Dichloroaniline diazonium salt           | 0.6%w/w  |
| <b>Ketone</b>                                |          |
| sodium nitroprusside                         | 5.9%w/w  |
| <b>Blood</b>                                 |          |
| diisopropylbenzene dihydroperoxide           | 26%w/w   |
| 3,3',5,5'- tetramethylbenzidine              | 1.6%w/w  |
| <b>Protein</b>                               |          |
| tetrabromophenol blue                        | 0.2%w/w  |
| <b>pH</b>                                    |          |
| methyl red                                   | 3.6%w/w  |
| bromothymol blue                             | 55.1%w/w |
| <b>Specific Gravity</b>                      |          |
| bromothymol blue                             | 4.8%w/w  |
| methyl vinyl ether and maleic acid copolymer | 90.6%w/w |
| <b>Nitrite</b>                               |          |
| p-arsanilic acid                             | 1.4%w/w  |
| 1,2,3,4-tetrahydrobenzo(h)quinolin- 3-ol     | 0.9%w/w  |
| <b>Leukocytes</b>                            |          |
| pyrrole amino acid ester                     | 4.3%w/w  |
| diazonium salt                               | 0.5%w/w  |
| <b>Glucose</b>                               |          |
| glucose oxidase                              | 1.8%w/w  |
| peroxidase                                   | 0.4%w/w  |
| potassium iodide                             | 0.3%w/w  |
| <b>Ascorbic Acid</b>                         |          |
| 2,6-dichlorophenol indophenol sodium         | 1.0%w/w  |
| <b>Urinary Calcium</b>                       |          |
| O-methophenolphthalein complex ketone        | 2.5%w/w  |
| <b>Creatinine</b>                            |          |
| 3,5-Dinitrobenzoic                           | 4.5%w/w  |
| <b>Microalbumin</b>                          |          |
| phenolsulfonphthalein dye                    | 2.4%w/w  |

100 strips/bottle

Рисунок 20 Внешняя (потребительская) упаковка варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 14 параметров URS-14MRQ (вид 4)



*Рисунок 21 Внешняя (потребительская) упаковка варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 14 параметров URS-14MRQ (вид 5)*



Рисунок 22 Внешняя (потребительская) упаковка варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 14 параметров URS-14MRQ (вид 6)



**mindray**

**URS-14MRQ**  
**Reagent Strips for Urinalysis**

Urinalysis strips for determination of urobilinogen, bilirubin, ketone, blood, protein, pH, specific gravity, nitrite, leukocytes, glucose, ascorbic acid, urinary calcium, creatinine, microalbumin.



**2023070301**



**20250702**



Jilin Leading Bio-engineering Co., Ltd.  
Address: 899 Yueda Road, New & High Tech Development Zone, Changchun, Jilin, P.R. China  
TEL : +86-431-81157499  
E-mail: info@clini-lab.com  
<https://www.clini-lab.com>

**100 strips/bottle**

Рисунок 23 Внутренняя упаковка (флакон) варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 14 параметров URS-14MRQ (вид 1)





Рисунок 25 Внутренняя упаковка (флакон) варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 14 параметров URS-14MRQ (вид 3)



Рисунок 26 Внутренняя упаковка (флакон) варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 14 параметров URS-14MRQ (вид 4)



Рисунок 27 Внутренняя упаковка (флакон) варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 14 параметров URS-14MRQ (вид 5)



*Рисунок 28 Крышка-платинка флакона варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 14 параметров URS-14MRQ*



Рисунок 29 Тест-полоска варианта исполнения Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 14 параметров URS-14MRQ

**Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU, в вариантах исполнения**

**[Наименование медицинского изделия]**

Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU, в вариантах исполнения.

**Варианты исполнения:**

Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU, в вариантах исполнения:

1. Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 11 параметров URS-11MRQ:  
- Тест полоски, 100 шт. – 1 уп.;  
- Инструкция по применению – 1 шт.

2. Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 14 параметров URS-14MRQ:  
- Тест полоски, 100 шт. – 1 уп.;  
- Инструкция по применению – 1 шт.

**[Спецификация упаковки]**

100 полосок/флакон

**[Назначение]**

Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU в вариантах исполнения для диагностики *in vitro*, предназначены для однократного применения, для определения патологических состояний организма человека для качественного определения компонентов мочи, включая нитриты (NIT), цветность и мутность, полуквантитетного определения компонентов мочи, включая лейкоциты (LEU), уробилиноген (URO), белок (PRO), билирубин (BIL), глюкозу (GLU), аскорбиновую кислоту (VitC), кетоны (KET), кровь (BLD), креатинин (CRE), микроальбумин (mALB), кальций (Ca), pH и количественного определения удельной плотности (SG) методом отражательной фотометрии.

**[Область применения]**

Клиническая лабораторная диагностика.

**[Функциональное назначение (например, скрининг, мониторинг, диагностика или вспомогательное средство в диагностике)]**

Для диагностики *in vitro*.

Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU, в вариантах исполнения предназначены для использования вместе с анализаторами автоматическими серии UA и станциями анализа мочи автоматическими серии EU

**[Специфическая патология, состояние или фактор риска, для обнаружения, определения или дифференцирования которого предназначено медицинское изделие для диагностики *in vitro*]**

Метод исследования компонентов мочи по принципу сухой химии с помощью тест-полосок играет важную роль в клинической диагностике и дифференциации системных заболеваний, в диагностике, оценке прогрессирования и прогнозировании заболеваний системы мочевыводящих путей.

Измерение концентрации билирубина обладает высокой диагностической ценностью для заболеваний печени и желчевыводящих путей. Комбинация концентрации веществ из семейства билиногенов и билирубина может использоваться для диагностики желтухи.

Кетонурия может возникать у пациентов с инфекционными заболеваниями и после общего наркоза. Гематурия часто встречается при воспалительной реакции мочевыводящих путей (острый нефрит, камни в почках, уретрит и т.д.), при различных отравлениях, ожогах, септицемии, малярии и других инфекциях. При воспалительной реакции мочевыводящих путей и урогенитального тракта в моче могут присутствовать лейкоциты.

Тест-полоски для анализа мочи на белок главным образом обнаруживают альбумин в моче. Протеинурия указывает на повышенную скорость клубочковой фильтрации, клубочковое и канальцевое повреждение нефронов.

В случае инфекции мочевыводящих путей и количестве бактерий в моче более 100000/мл анализ на нитриты даст положительный результат. Измерение удельной плотности мочи позволяет оценить концентрационную функцию почек, значение pH мочи варьируется в диапазоне 5,0-8,5. Микроальбумин является ранним маркером прогрессирующего клубочкового повреждения, диабетической нефропатии, сердечно-сосудистых заболеваний. Во время беременности

Рисунок 30 Инструкция по применению – 1 шт.

т-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 11 параметров URS-11MRQ:

- Тест полоски, 100 шт. – 1 уп.;

- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*Только для диагностики in vitro, для профессионального применения;*

*Код партии, номер по каталогу, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке*

**Производитель:**

Jilin Leading Bio-engineering Co., Ltd.,

899 Yueda Road, New&High Tech Development Zone, Changchun, Jilin, P.R. China (KHP)

**Уполномоченный представитель в РФ:**

ООО «Миндрей Медикал Рус»

129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, антресоль 4, помещение I, ком. 7, 11а.

Тел. +7 (499) 553-60-36

*\*Информацию на стикере считать приоритетной*

Тест-полоски для исследования компонентов мочи на анализаторах автоматических серии UA и станциях анализа мочи автоматических серии EU для измерения 14 параметров URS-14MRQ:

- Тест полоски, 100 шт. – 1 уп.;

- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*Только для диагностики in vitro, для профессионального применения;*

*Код партии, номер по каталогу, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке*

**Производитель:**

Jilin Leading Bio-engineering Co., Ltd.,

899 Yueda Road, New&High Tech Development Zone, Changchun, Jilin, P.R. China (KHP)

**Уполномоченный представитель в РФ:**

ООО «Миндрей Медикал Рус»

129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, антресоль 4, помещение I, ком. 7, 11а.

Тел. +7 (499) 553-60-36

*\*Информацию на стикере считать приоритетной*

*Рисунок 31. Макеты маркировки для Российской Федерации*

По доверенности от  
31.07.24 г.  
Ян Си

