

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «НВ-ЛАБ»

Дубин М.Е.

« 01 ноября 2024 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Автоклав медицинский BA clave

Производитель: ОДО «БЕЛАКВИЛОН», Республика Беларусь, 223018 Минская область, Минский район, район деревни Тарасово, здание ОДО «БЕЛАКВИЛОН»



Общий вид автоклава на примере модели автоклава 150 V

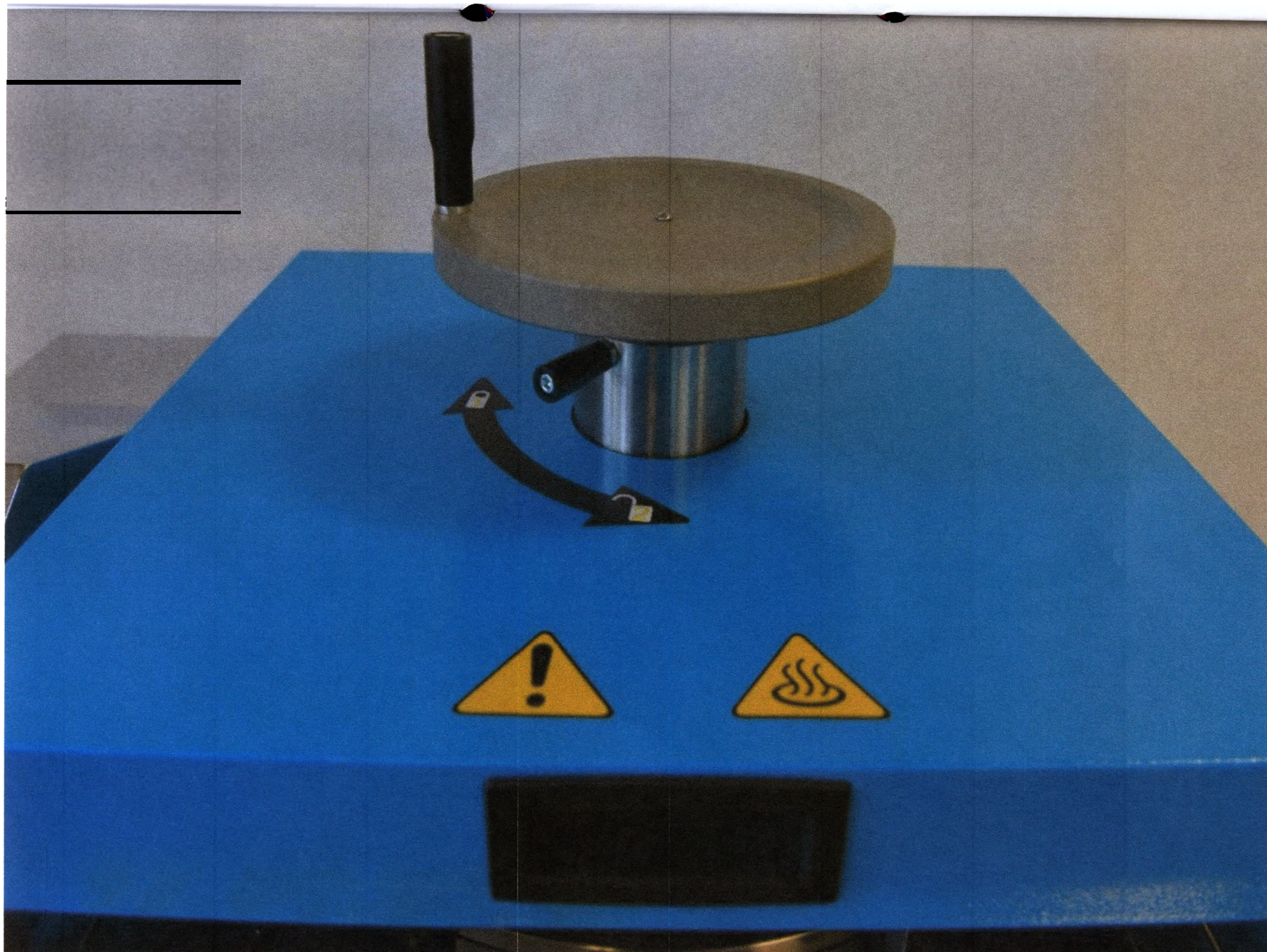


Вид сверху на примере модели автоклава 150 V




Общий вид: Биксы КСК-12




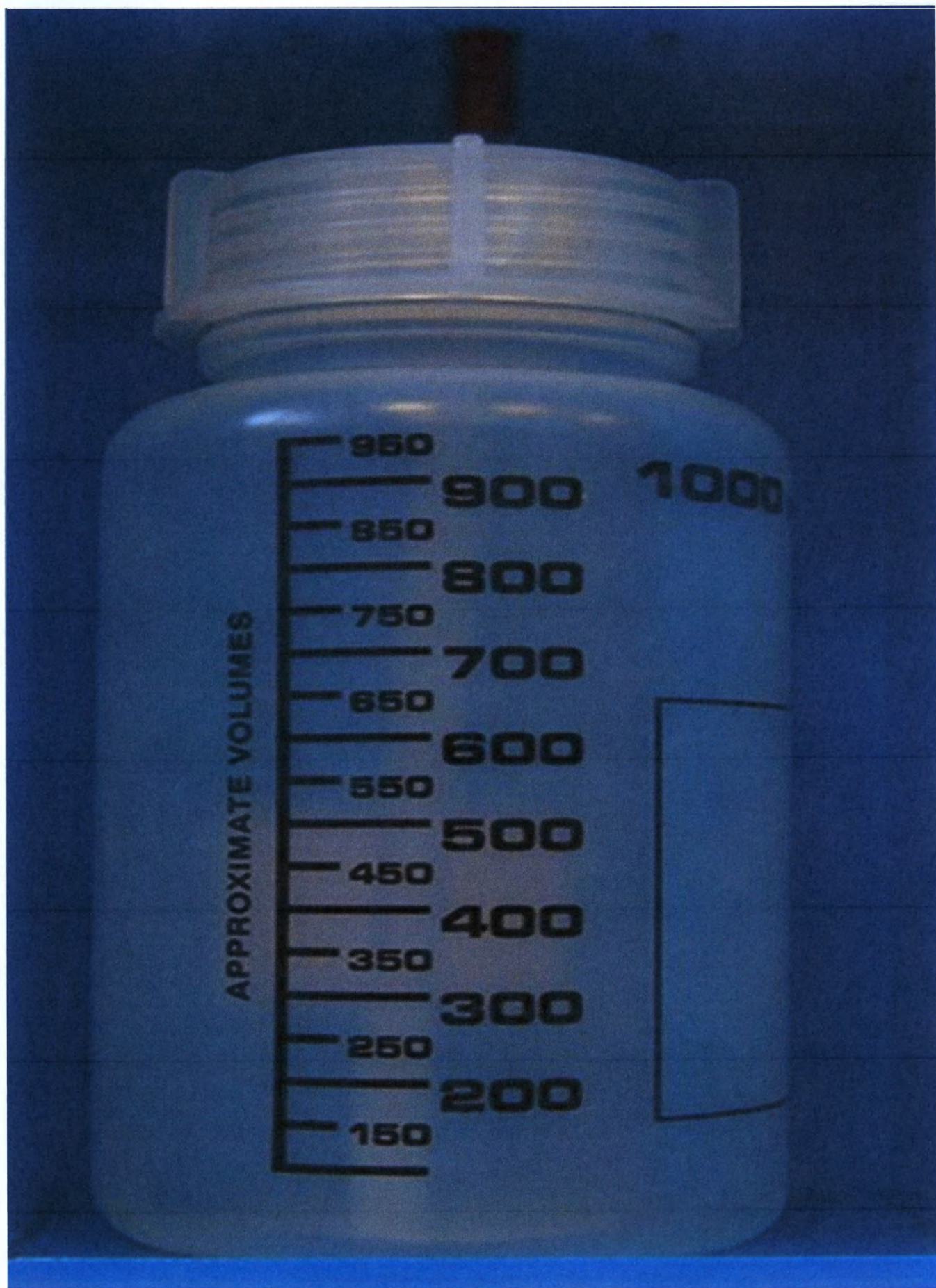


Общий вид: Пластиковая емкость

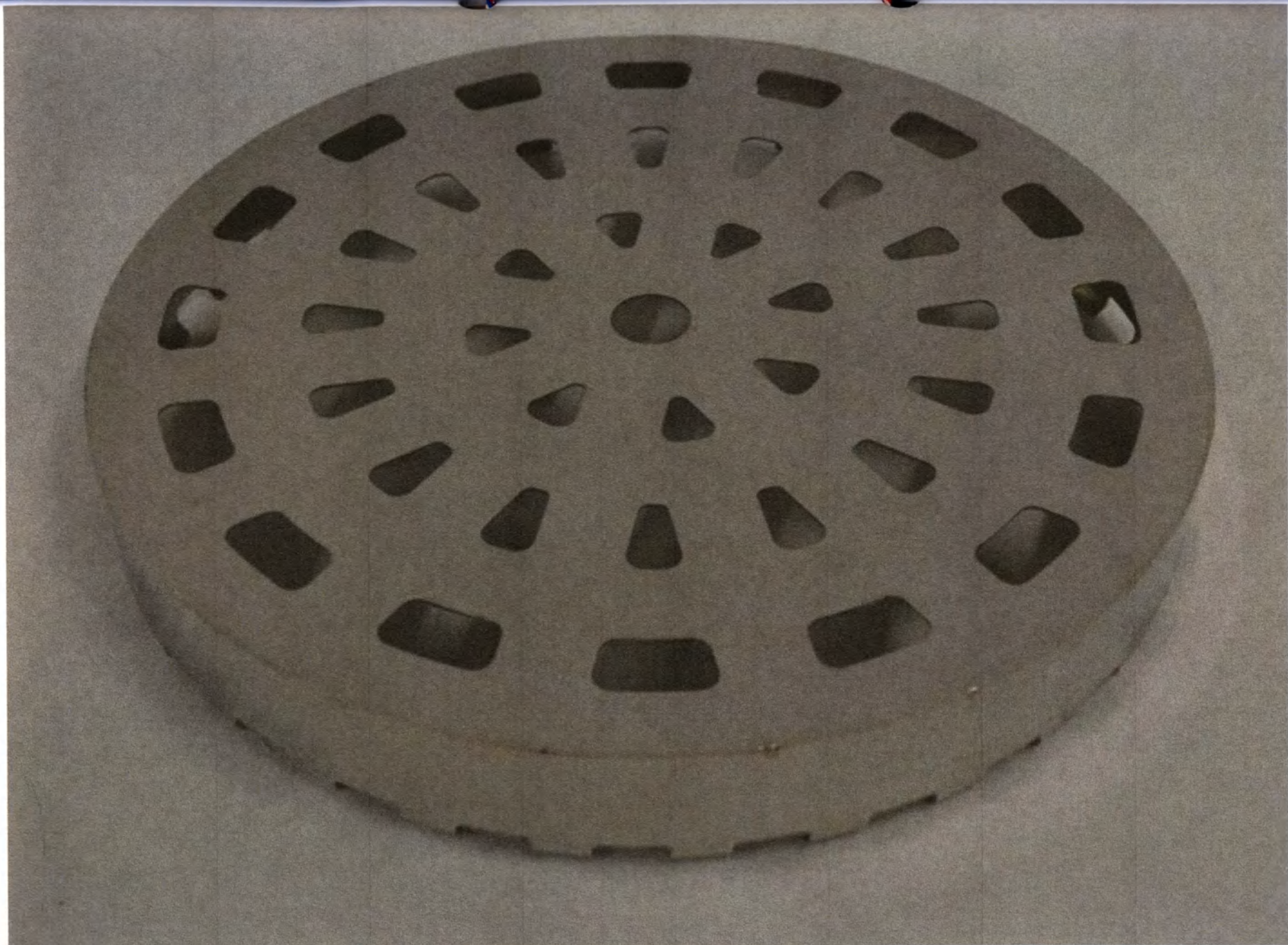

Общий вид: Защитная подставка Ø340

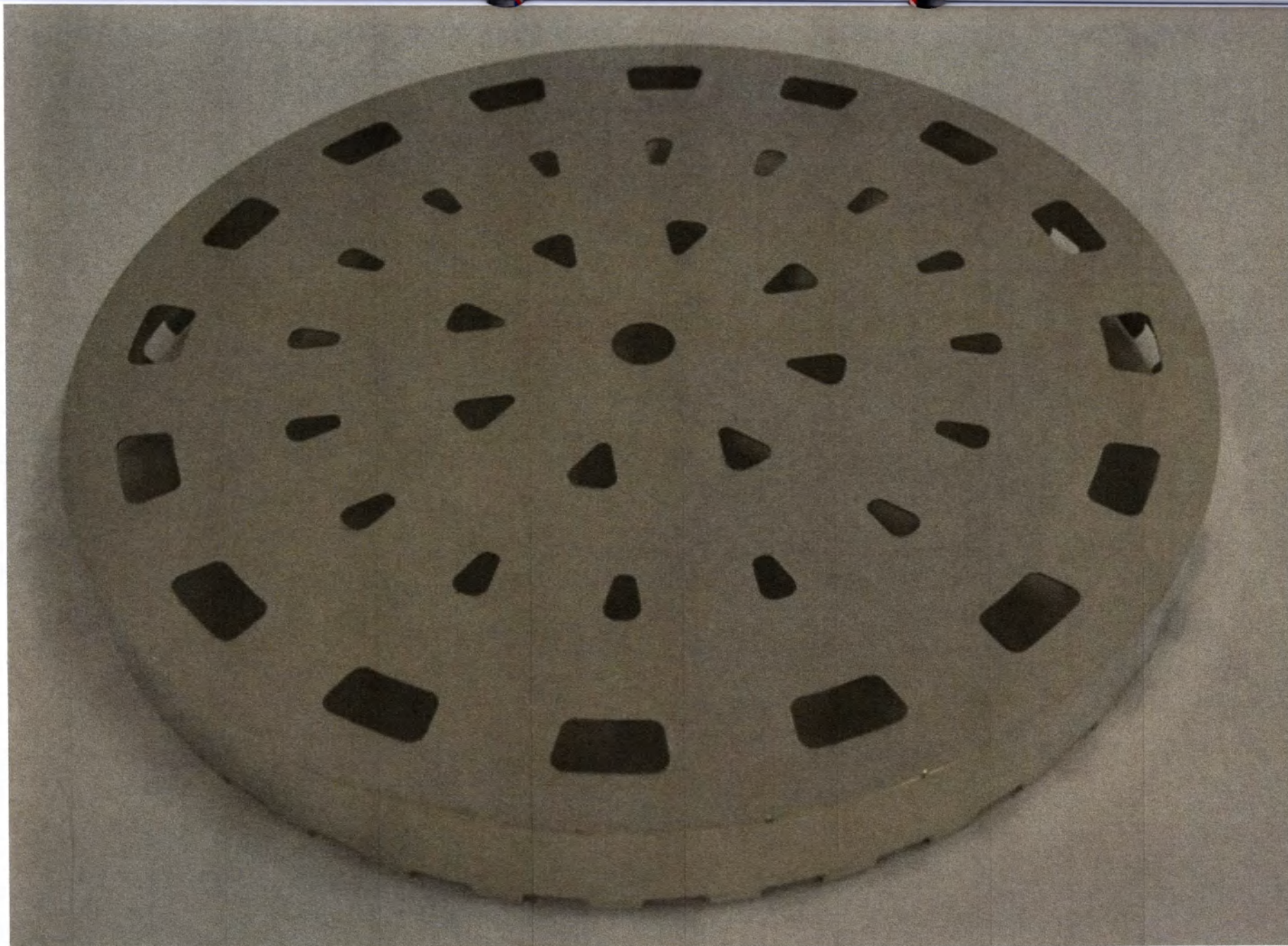

Общий вид: Защитная подставка Ø440

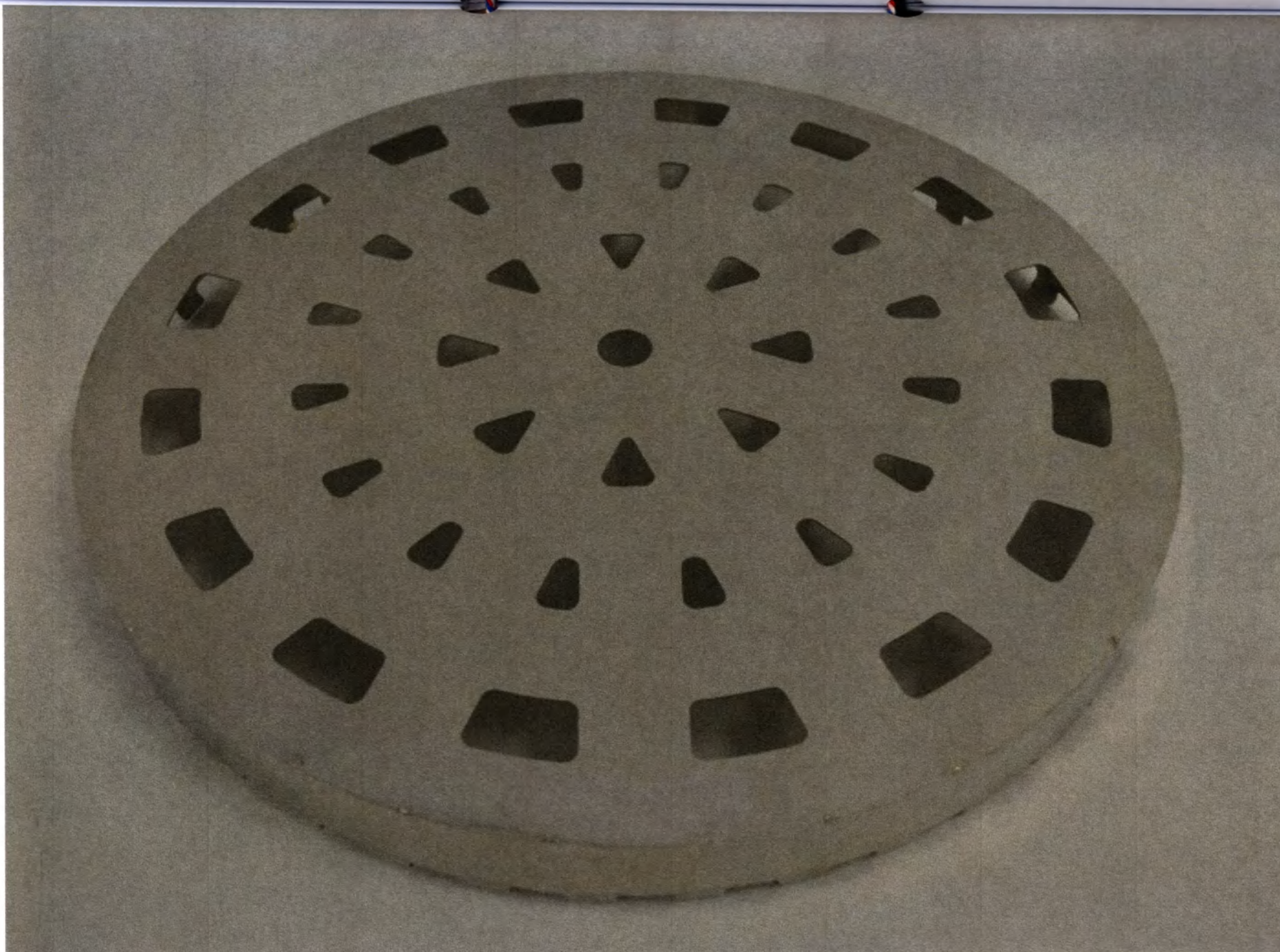

Общий вид: Защитная подставка Ø490

ФОТО МАРКИРОВКИ ИЗДЕЛИЯ

Маркировка автоклава на примере модели автоклава 150 V:





Подключение оборудования к электросети

Подключать согласно инструкции!
Заземление ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Коричневый (Brown) — Фаза1 230VAC
Черный (Black) — Фаза2 230VAC
Синий (Blue) — Ноль
Желто-зеленый (Yellow-Green) — Земля





Подключение оборудования к электросети

Подключать согласно инструкции!
Заземление ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Коричневый (Brown) — Фаза1 230VAC
Черный (Black) — Фаза2 230VAC
Синий (Blue) — Ноль
Желто-зеленый (Yellow-Green) — Земля



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



- Изучайте инструкцию по эксплуатации автоклава до начала работы
- Проверяйте уровень воды в камере перед началом работы
- Используйте только дистиллированную воду
- Плотно закрывайте камеру автоклава во время использования
- Не прикасайтесь к автоклаву во время работы для избежания получения ожогов
- Находитесь на расстоянии не менее 50 см во время работы автоклава
- Не устанавливайте температуру стерилизации выше 132°C
- Отключайте автоклав при увеличении рабочего давления выше 2,5 бар (0,25 МПа)
- Открывайте кран ручного сброса пара перед каждым поднятием крышки автоклава
- Обратитесь в региональный сервисный центр в случае технических неисправностей или вопросов техники безопасности



держите
дистанцию



закрывайте
плотно



горячий
пар



горячая
поверхность



взрывоопасно

132°C

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Выбор температуры

- Нажмите «МЕНЮ»
- Нажмите «ТЕМПЕРАТУРА»
- Установите значение температуры и нажмите «ОК»
- Нажмите «ВЫХОД»

Выбор времени

- Нажмите «МЕНЮ»
- Нажмите «ВРЕМЯ»
- Установите значение времени и нажмите «ОК»
- Нажмите «ВЫХОД»

Запуск

- Нажмите «СТАРТ» для начала стерилизации
- На дисплее будет отображаться текущий этап процесса

Завершение

- Звуковой сигнал и надпись "Цикл окончен" указывают на окончание процесса
- Нажмите «СТОП»
- Откройте кран сброса пара
- Откройте камеру автоклава


Обратитесь к инструкции по эксплуатации для получения дополнительной информации

ОДО «БЕЛАКВИЛОН»
Адрес: 223018, Беларусь,
Минская область, Минский
район, район деревни
Тарасово, здание ОДО
«БЕЛАКВИЛОН»

телефакс:
+375(17)612-15-78/75

email:
service@belavilon.by



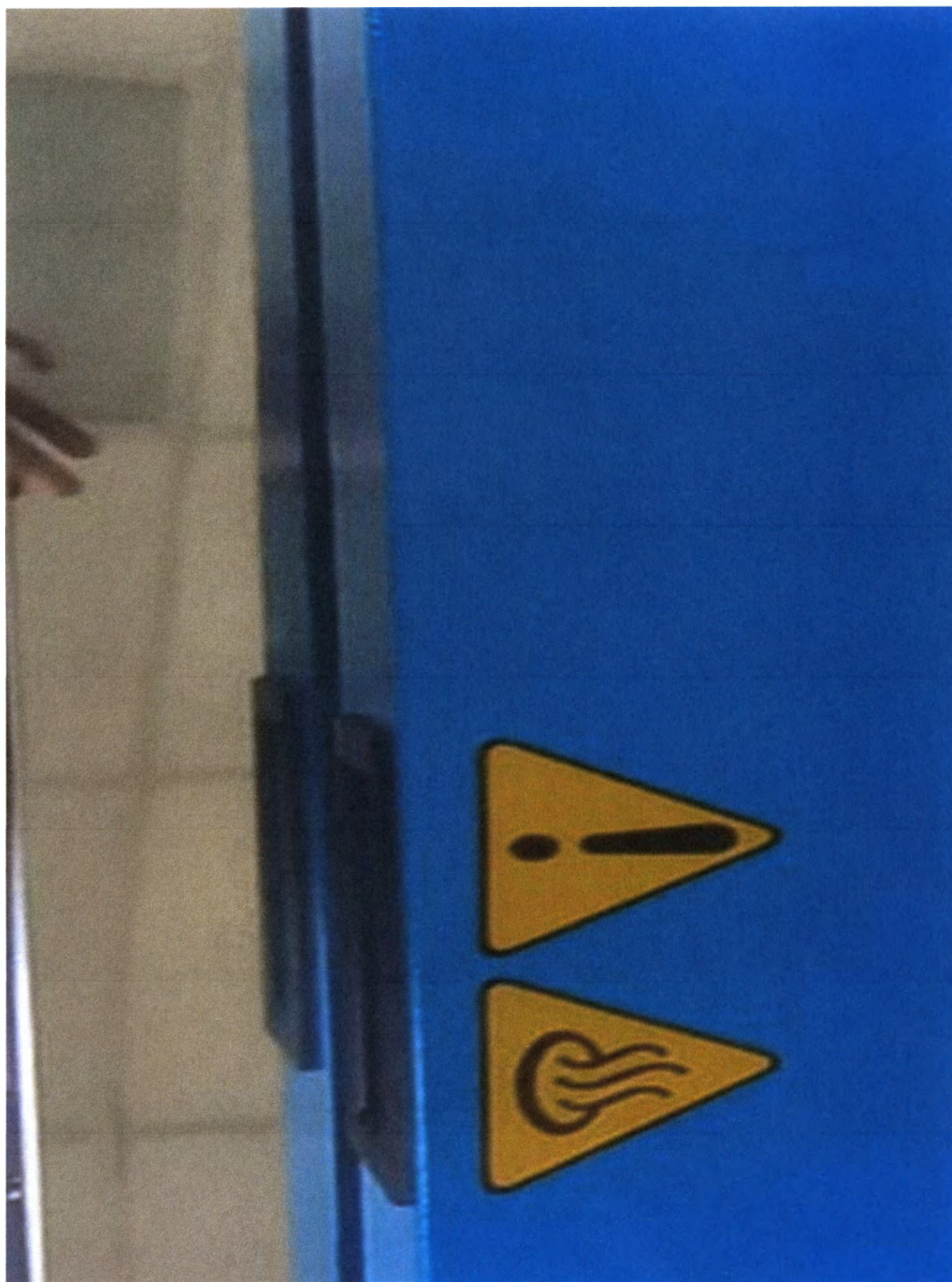

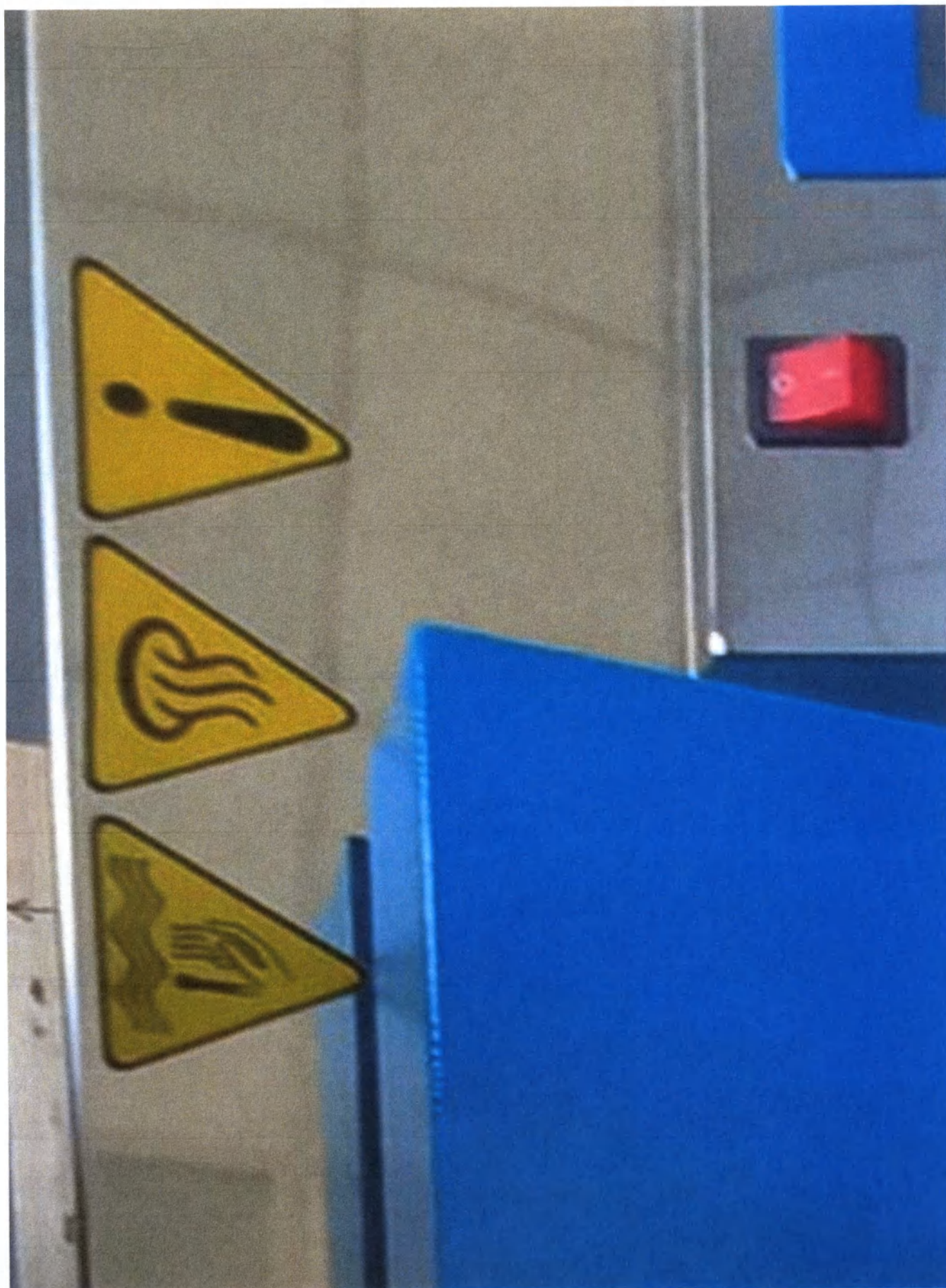


ФОТО ИЗДЕЛИЯ В УПАКОВКЕ
Упаковка изделия на примере модели автоклава 150 V



ФОТО МАРКИРОВКИ УПАКОВКИ
Маркировка упаковки на примере модели автоклава 150 V




Автоклав медицинский BA slave


Модель:	150 V
Состав изделия:	- автоклав с вертикальной загрузкой BA slave 150 V - 1 шт. - биксы КСК-18 - 2 шт. - пластиковая емкость - 1 шт. - защитная подставка Ø490 - 1 шт.
Масса брутто:	не более 341кг

Рег.уд. № _____ от _____

Условия хранения:

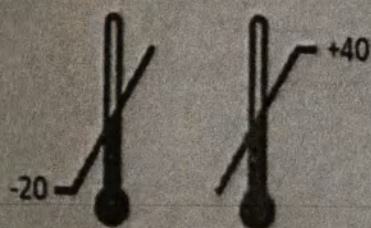

Условия транспортирования:

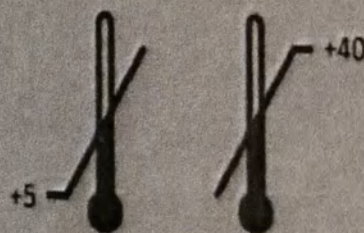

Изготовитель: ОДО «БЕЛАКВИЛОН», Республика Беларусь,
223018, Минская область, Минский район, район деревни
Тарасово, здание ОДО «БЕЛАКВИЛОН»

ВНИМАНИЕ! Бокс не кантовать!

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

16 (шестнадцать)
листов
цифрами
прописью

Должность Директор

Подпись Будыш Н.Е.

« 01 » ноября 20 24 г.

