КОПИЯ

KOSSAN

STRETCHING LIMITS • SINCE 1979

KOSSAN INTERNATIONAL SDN. BHD. (273178-M)

«APPROVED»/ «СОГЛАСОВАНО»
Director / Директор
Position/Должность
Lim Siau Tian / Лим Сяу Тян
Name/Имя
14.11.2024
Date/Дата

Signature/ Подпись
Stamp/ Печать

INSTRACTION FOR USE
for medical device

DIAGNOSTIC GLOVES MEDIOK NITRILE POWDER-FREE TEXTURED WITH ROLLER NON-STERILE HYPOALLERGENIC LOW DERMA/

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
на медицинское изделие

ПЕРЧАТКИ MEDIOK ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ, С ВАЛИКОМ, НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЕ LOW DERMA

Kossan International Sdn. Bhd,
Wisma Kossan, Lot 782,
Jalan Sungai Putus, Off Batu 3 ¾,
Jalan Kapar, 42100 Klang,
Selangor, Malaysia

«Коссан Интернешнл Сдн.Бхд.»
Висма Коссан, участок 782,
Джалан Сунгай Путус, Офф Бату 3 ¾,
Джалан Капар, 42100 Кланг,
Селангор, Малайзия

Version 1.1/Версия 1.1

S.S. RAVICHANDREN
NOTARY PUBLIC: NOTARI AWAM
No: 1, Lorong Kasawari 4B,
Taman Eng Ann, 41150 Klang,
Selangor D.E., Malaysia.
PN (S[illegible]) 25/73/2023
Nov 19 2024

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. Наименование медицинского изделия:

«Перчатки диагностические mediOk нитриловые неопудренные одноразовые текстурированные, с валиком, нестерильные гипоаллергенные LOW DERMA»

«Перчатки диагностические mediOk нитриловые неопудренные одноразовые текстурированные, с валиком, нестерильные гипоаллергенные LOW DERMA»

I. Варианты исполнения:

1. Перчатки диагностические mediOk нитриловые неопудренные одноразовые текстурированные, с валиком, нестерильные гипоаллергенные LOW DERMA; размер: XS, S, M, L, XL; XXL; цвет: голубой, черный, фиолетовый, белый, розовый, черничный, зеленый – 25 пар/50 шт./уп.
2. Перчатки диагностические mediOk нитриловые неопудренные одноразовые текстурированные, с валиком, нестерильные гипоаллергенные LOW DERMA; размер: XS, S, M, L, XL; XXL; цвет: голубой, черный, фиолетовый, белый, розовый, черничный, зеленый – 50пар/100 шт./уп.
3. Перчатки диагностические mediOk нитриловые неопудренные одноразовые текстурированные, с валиком, нестерильные гипоаллергенные LOW DERMA; размер: XS, S, M, L, XL; XXL; цвет: голубой, черный, фиолетовый, белый, розовый, черничный, зеленый – 75 пар/150 шт./уп.
4. Перчатки диагностические mediOk нитриловые неопудренные одноразовые текстурированные, с валиком, нестерильные гипоаллергенные LOW DERMA; размер: XS, S, M, L, XL; XXL; цвет: голубой, черный, фиолетовый, белый, розовый, черничный, зеленый – 100 пар/200 шт./уп.

II. Инструкция по применению.

Примечание: Далее по тексту настоящего документа допускается использовать следующее обозначение изделия:
Перчатки, Изделие

2. Сведения о разработчике, производителе, месте производства медицинского изделия

2.1. Производитель

Kossan International Sdn. Bhd. (Коссан Интернешнл Сдн.Бхд)
Wisma Kossan, Lot 782,
Jalan Sungai Putus, Off Batu 3 ¾, Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
(Висма Коссан, участок 782, Джалан Сунгай Путус, Офф Бату 3 ¾, Джалан Капар, 42100, Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия)

2.2. Разработчик

Kossan International Sdn. Bhd. (Коссан Интернешнл Сдн.Бхд)
Wisma Kossan, Lot 782,
Jalan Sungai Putus, Off Batu 3 ¾, Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
(Висма Коссан, участок 782, Джалан Сунгай Путус, Офф Бату 3 ¾, Джалан Капар, 42100, Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия)

2.3. Место производства

Kossan International Sdn. Bhd. (Коссан Интернешнл Сдн.Бхд)
Wisma Kossan, Lot 782,
Jalan Sungai Putus, Off Batu 3 ¾, Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
(Висма Коссан, участок 782, Джалан Сунгай Путус, Офф Бату 3 ¾, Джалан Капар, 42100, Кланг, Селангор Дарул Эхсан, Малайзия)

3. Назначение, показания и область применения медицинского изделия

3.1. Назначение медицинского изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Перчатки предназначены в качестве двухстороннего барьера для защиты рук медицинского персонала от различной контаминации при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, при оказании первой медицинской помощи пострадавшему пациенту при ранениях и травмах, а также предупреждение перекрестного заражения пациентов и персонала.

Перчатки предназначены для медицинского персонала и пациентов в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, службах экстренной медицинской помощи, передвижных медицинских комплексах, полевых госпиталях, поликлинических условиях, общественных организациях и других социальных учреждениях.

3.2. Область применения

Стационарные, амбулаторно-поликлинические и лечебно-профилактические учреждения, передвижные медицинские комплексы, службы экстренной медицинской помощи, полевые госпитали, поликлиники, общественные организации и другие социальные учреждения.

3.3. Показания к применению

Изделие предназначено для одноразового применения для индивидуальной защиты кожи рук во время медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, при оказании первой медицинской помощи пострадавшему пациенту при ранениях и травмах с целью защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения.

4. Противопоказания и возможные побочные эффекты

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость (повышенная чувствительность к компонентам изделия).

Возможные побочные эффекты:

Возможны аллергические реакции на отдельные компоненты изделия на коже людей, склонных к аллергическим реакциям, особенно на фоне повышенного потоотделения.

5. Условия применения

Изделие должно эксплуатироваться при температуре от +10°С до +35°С и относительной влажности воздуха до 80%.

6. Способ применения

1. Вскрыть групповую упаковку перчаток, при обнаружении механических повреждений, разрывов, загрязнений использовать изделие не рекомендуется.
2. Извлечь перчатки, последовательно надеть перчатки сначала на одну, затем на другую руку.
3. По окончании применения взяться за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. Стянуть перчатку и удерживать ее другой рукой. Поместить пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стянуть ее аналогично первой. Вывернув перчатку наизнанку, использовать ее в качестве чехла для другой перчатки.
4. После использования утилизировать в контейнер для отходов класса Б.

7. Предупреждения, меры предосторожности и ограничения при использовании

- ЗАПРЕЩЕНО применение перчаток при нарушении целостности упаковки
- ЗАПРЕЩЕНО использование при наличии повреждений самого изделия (надрезы, проколы, разрывы и т.п.).
- ЗАПРЕЩЕНО повторное применение использованного изделия.
- ЗАПРЕЩЕНО применение изделия после окончания срока годности.
- ЗАПРЕЩЕНО обрабатывать спиртосодержащими и агрессивными химическими растворами поверхности перчаток, так как эти растворы разрушают защитный слой перчаток
- ЗАПРЕЩЕНО использовать одну и ту же пару перчаток при переходе от одного пациента к другому или при переходе от одной манипуляции к другой.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- ЗАПРЕЩЕНО использовать перчатки, если перчатка начинает набухать, растягиваться, прилипать или свободно сидеть на руке.
- При применении перчаток ногти должны быть коротко и аккуратно подстрижены. Использование искусственных ногтей не допускается.
- Следует снимать ювелирные изделия и часы при использовании перчаток.
- Время эксплуатации (применения) перчаток не должно превышать 2-3 часа.
- При возникновении неприятных ощущений, аллергических реакций, связанных с применением изделий, следует прекратить их использование и проконсультироваться с медицинским специалистом.

8. Описание конструктивных особенностей

Перчатки имеют следующие постоянные характеристики:

- материал производства: синтетический нитриловый каучук;
- кратность применения: одноразовые;
- отделка: текстурированные (в области пальцев);
- обработка внутренней поверхности: неопудренные;
- исполнение манжеты: с валиком по краю;
- форма: неанатомическая, универсальная для обеих рук.

Переменные характеристики в зависимости от цветового исполнения и размера:

- цвет: голубой, черный, фиолетовый, белый, розовый, черничный, зеленый;
- размер: XS, S, M, L, XL, XXL

9. Описание материалов, содержащихся в медицинском изделии, включая материалы, контактирующие с организмом человека:

Основной материал: нитрил - синтетический гипоаллергенный полимерный каучуковый материал. Он не пропускает влагу и обеспечивает повышенную защиту от брызг кислот, щелочей, масел и других агрессивных веществ. Он не содержит тяжелых металлов, которые могут нанести вред здоровью человека.

Остальные компоненты: оксид цинка, двуокись титана, гидроксид калия и пигменты – не токсичны, не содержат тяжелые металлы, которые могут нанести вред здоровью человека.

10. Технические характеристики медицинского изделия

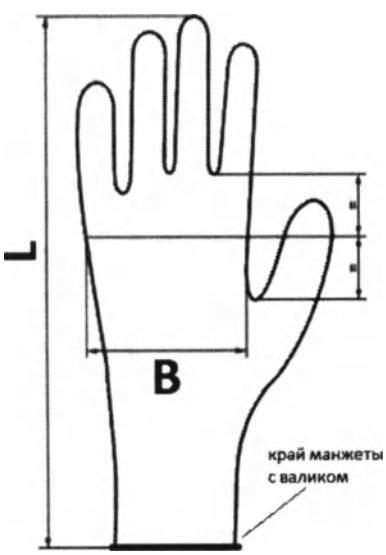


Рис.1

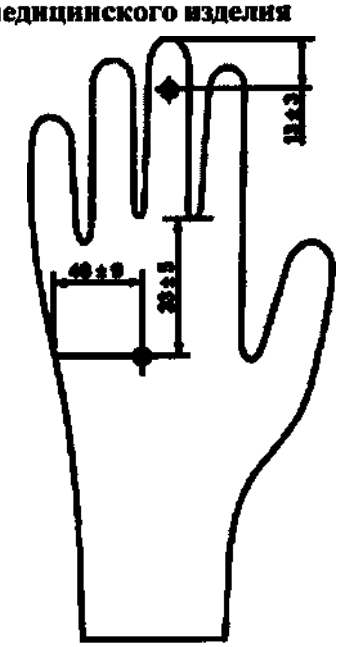


Рис.2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Табл. 1. Габаритные размеры перчаток:

Размер	Ширина, мм	Длина, мм не менее	*Толщина согласно рисунку, не менее, мм		
			Манжета	Ладонь	Палец
XS	70±10	220	0,08	0,08	0,11
S	80±10	220			
M	95±10	230			
L	110±10	230			
XL	115±10	230			
XXL	120±10	235			

* максимальная допустимая толщина (ладонь) не более 0.22 мм

Масса одной перчатки не более 10,0 г (для всех размеров)

Таблица 2 Прочностные характеристики перчаток

Условие	Показатель	Значение
До ускоренного старения	Усилие при разрыве (Н), не менее	7,0
	Удлинение при разрыве (%), не менее	500
После ускоренного старения	Усилие при разрыве (Н), не менее	6,0
	Удлинение при разрыве (%), не менее	400

Если дата изготовления неизвестна или с момента получения перчаток потребителем прошло более 3 месяцев, характеристики усилия и удлинения при разрыве должны соответствовать значениям после ускоренного старения.

Масса опудривающего вещества на неопудренных перчатках не более 2,0 мг. на перчатку.

Перчатки герметичные, уровень качества герметичности (AQL) 1,0.

Перчатки с валиком круглого сечения на краю манжеты, диаметр валика не более 2,5 мм

Перчатки при транспортировании и хранении должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов.

11. Вид контакта с организмом человека

Изделие имеет кратковременный контакт с неповрежденными и поврежденными кожными покровами и слизистыми оболочками организма человека.

12. Техническое обслуживание

Перчатки являются одноразовым изделием и не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

13. Перечень материалов животного/человеческого происхождения

Изделие не содержит материалов животного/человеческого происхождения.

14. Общее описание принадлежностей

Принадлежностей нет.

15. Изделия, предусмотренные для совместного использования

Изделие не применяется в комбинации с другими изделиями.

16. Маркировка и упаковка изделия

16.1. Описание маркировки

Маркировка групповой потребительской упаковки содержит следующую информацию:

- наименование изделия;
- символ «Изготовитель», наименование и адрес изготовителя;
- наименование, местонахождение и адрес электронной почты уполномоченного представителя;

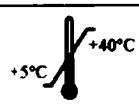
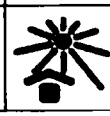
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- информация о назначении и способе применения;
- символ и надпись «Не содержит натуральный латекс»;
- символ и надпись: «Нестерильно»;
- символ «Запрет на повторное применение» и надпись: «Перчатки одноразовые! Не использовать повторно!»;
- символ «Не допускать воздействия солнечного света»;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде» со ссылкой на ресурс **www.mediok.ru**;
- символ «Не допускать воздействия влаги»;
- символ «Температурный диапазон»;
- символ «Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению»;
- надпись соответствие ГОСТ Р 52239-2004 в части пп. 6.1, 6.2, 6.3.2, 6.3.3, 8.2.2, 8.3;
- номер и дата Регистрационного удостоверения;
- символ «Код партии» и номер;
- символ «Номер по каталогу» и номер;
- символ и надпись «Дата изготовления» и дата цифрами (месяц, год);
- символ «Использовать до» и дата цифрами (месяц, год);
- размер и количество перчаток;
- информация о цветовом исполнении печаток;
- информация о виде отделки перчаток;
- информация об условиях хранения;
- надпись: «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ»;
- надпись: «НЕАНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ»;
- символ «Текстурированные»;
- символ «Неопудренные»;
- символ «Подходят для обеих рук (неанатомические)»;
- символ «Диагностические (смотровые)»;
- знак «LOW DERMA»;
- штрих-код;
- QR-код (индивидуальная маркировка каждой единицы потребительской упаковки «Честный знак»).

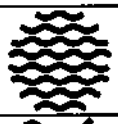
Штрих-код и QR-код должны содержать следующую информацию: наименование, адрес, ИНН, веб-сайт уполномоченного представителя производителя; наименование медицинского изделия, артикул, цвет; количество изделий в упаковке, срок годности).

Маркировка наносится на языке страны обращения изделия, исключая имена собственные и наименования.

16.2. Описание символов:

Символ	Описание	Символ	Описание
	Изготовитель		Использовать до
	Дата производства		Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению
	Температурный диапазон		Не допускать воздействия солнечного света

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде		Не допускать воздействия влаги
	Не стерильно		Не содержит натуральный латекс
	Запрет на повторное применение		Номер по каталогу
	Код партии		Текстурированные
	Подходят для обеих рук (неанатомические)		Неопудренные
	Диагностические (смотровые)		

16.3. Упаковка

МИ «Перчатки диагностические mediOk нитриловые неопудренные одноразовые текстурированные, с валиком, нестерильные гипоаллергенные LOW DERMA» одного исполнения в количестве 25 пар (50 штук)/50 пар (100 штук)/75 пар (150 штук)/100 пар (200 штук) должны быть упакованы в потребительскую (индивидуальную) упаковку – картонную коробку

№ п/п	Количество перчаток в потребительской упаковке	Размеры потребительской упаковки, ±10%, мм	Количество потребительских упаковок в транспортной упаковке, шт.
1	25 пар (50 штук)	200x110x40	20
2	50 пар (100 штук)	210x110x60	10
3	75 пар (150 штук)	230x120x70	10
4	100 пар (200 штук)	240x130x80	10

Потребительская упаковка выполнена из мелованного двухслойного картона с обратной стороны коричневого цвета.

Масса групповой упаковки: не более 1500 г (независимо от варианта исполнения).

Коробка позволяет сохранять качество перчаток при транспортировании и хранении.

Масса упаковки, брутто: не более 15,0 кг.

Размеры транспортной картонной коробки (Длина x Ширина x Высота, в см, не более): 50x30x40.

Транспортная упаковка выполнена из гофрокартона.

В коробку должна быть вложена инструкция по применению и товарная накладная (при необходимости) с указанием наименований и количества изделий. Транспортная тара с перчатками оклеена лентой.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

17. Требования к утилизации

Использованное изделие вследствие возможного инфицирования инфекционными агентами: вирусами, бактериями, зараженными микробами биологическими жидкостями может представлять инфекционную, микробную, экологическую опасность. Использованные по назначению изделия утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса Б.

Неиспользованные изделия с истекшим сроком хранения утилизируются как медицинские отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21. Изделия пригодны к переработке для вторичного использования. Правила сдачи и переработки необходимо уточнять у региональных переработчиков вторсырья.

18. Требования к транспортированию и хранению

Изделия должны транспортироваться только в упаковке всеми видами закрытых транспортных средств и по правилам перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Температура при транспортировании – от -50°С до +50°С. Относительная влажность воздуха: до 80%.

После транспортировки при минусовых температурах оставить на 2 часа при комнатной температуре.

Изделия должны храниться в сухих проветриваемых складских помещениях, быть защищены от прямых солнечных лучей и атмосферных воздействий и находиться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

Температура хранения изделий должна быть от +5°С до +40°С. Относительная влажность воздуха: до 80%.

19. Требования очистки, дезинфекции и стерилизации

Изделие поставляется нестерильным. Изделие не подлежит очистке и дезинфекции.

20. Остаточные риски, связанные с применением медицинского изделия

Остаточные риски, связанные с применением медицинского изделия, малы по сравнению с пользой от применения изделия. Остаточные риски приемлемы для следующих видов опасностей:

- несоблюдение правил и установленных условий хранения, транспортирования или эксплуатации;
- повторное применение уже использованного изделия;
- применение изделия при нарушении целостности упаковки;
- использование изделия после истечения срока эксплуатации;
- нарушение установленного порядка утилизации использованных изделий;
- невнимательное ознакомление с инструкцией по применению;
- сознательное нарушение установленного порядка применения;
- недостаточно информативная и доступная инструкция по применению изделия;
- разрыв изделия при резких манипуляциях при надевании и эксплуатации в результате излишне сильного воздействия на изделие потребителя;
- производственный брак.

21. Гарантии производителя

Изделие спроектировано, изготовлено, протестировано и упаковано в соответствии со всеми стандартами. Производитель предоставляет гарантию на данный продукт до истечения срока годности при условии, что его упаковка не сломана, не вскрыта или не повреждена.

Производитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям технической документации при соблюдении условий применения, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

22. Международные и национальные стандарты, используемые при производстве

- ГОСТ Р 52239-2004 «Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора»
- ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 «Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования»
- ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными»;
- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;
- ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия»;
- ГОСТ ISO 10993-11-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия»;
- ГОСТ ISO 10993-12-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Отбор и подготовка образцов для проведения исследований»;
- ГОСТ ISO 10993-23-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 23. Исследования раздражающего действия»
- СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

23. Рекламация

Рекламации подлежат:
- изделия с дефектами, выявленными при эксплуатации, хранении и транспортировании в течение установленного гарантийного срока;
- изделия, у которых выявлено несоответствие тары, упаковки, маркировки, и комплектности требованиям сопроводительной документации.
- информация о побочных эффектах и неблагоприятных событиях во время эксплуатации перчаток.

Рекламации не предъявляют:
- по истечении срока гарантийных обязательств на изделие;
- если обнаруженные дефекты явились результатом несоблюдения потребителем условий и правил эксплуатации (применения), хранения и транспортирования.

Рекламации направлять по адресу уполномоченного представителя на территории России: ООО «ТДЕ».

24. Сведения о уполномоченном представителе производителя

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ЕВРАЗИЯ» (ООО «ТДЕ»), 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, этаж 23, пом. I, ком.6
тел.: +7 (495) 744-32-82; e-mail: info@mediok.ru

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

[Перевод печатей, надписей и штампов на документе, предоставленном на русском языке]

[*Логотип:* КОССАН / РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ / С 1979 (KOSSAN / STRETCHING LIMITS • SINCE 1979)]

КОССАН ИНТЕРНЭШНЛ СДН. БХД. (KOSSAN INTERNATIONAL SDN. BHD.) (273178-M)

/подпись/

С.С. РАВИЧАНДРЕН (S.S. RAVICHANDREN)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС: NOTARI AWAM
№: 1 Лоронг Касавари 4В, Таман Энг Анн, 41150 Кланг, Селангор Д.Э., Малайзия. (No:1, Lorong Kasawari 4B,
Taman Eng Ann, 41150 Klang,
Selangor D.E., Malaysia).
PN (Sivil) 25/73/2000
19 ноября 2024 г.

Перевод с английского на русский язык выполнен переводчиком Гайдеровой Ольгой Игоревной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать первое декабря две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Обухов Руслан Юрьевич, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Сопина Вадима Николаевича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Гайдеровой Ольги Игоревны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/783-н/77-2024-22-1373

Уплачено за совершение нотариальных действия: 400 руб. 00 коп.

Р.Ю.Обухов

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 10 (десять)
_____ листов.
Нотариус

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать первое декабря две тысячи двадцать четвёртого года

Я, **Обухов Руслан Юрьевич, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Сопина Вадима Николаевича**, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № **77/883-н/77-2024-22-1389**.

Уплачено за совершение нотариального действия: 1100 руб. 00 коп.

Р.Ю.Обухов

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 11 (одиннадцать) листов.

Р.Ю.Обухов

Компьютерная система "Экспресс"

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU