УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ЭВТЕКС»

_____Бобылев С.В.

(подпись)

«31» июля 2024 г.

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ

по ТУ 21.20.24–015-14959781-2023

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата введения 13.08.2024

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1 НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование

Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся по ТУ 21.20.24-015-14959781-2023.

(далее по тексту «Бинт» или «Изделие»)

2 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭВТЕКС» (ООО «ЭВТЕКС»).

Юридический адрес: 153000, Ивановская область, г.о. Иваново, г. Иваново, ул. Марии Рябининой, д. 5, офис 8, 9

Адрес производства: 153025, Ивановская область, г.Тейково, ул.Западная, д.8

Контактные телефоны: +7 (495) 707 10 09

E-mail: evers@evers.ru

3 НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, УСТАНОВЛЕННОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся предназначен для фиксации перевязочных средств, компрессов путем самофиксирования (когезивности) на различных частях тела без прямого контакта с открытой раневой поверхностью (однократное применение).

Краткое описание медицинского изделия:

Бинт представляет собой отрез (рулон), изготовленный из вискозной пряжи с добавлением пневмосоединенной нити и термопластичным полимером. Компоненты состава обеспечивают изделию функцию самофиксации – когезивности, позволяющую удерживать бинт на различных участках тела пациента без дополнительного крепления.

Классификация бинтов согласно ГОСТ Р 58852:

- группа: медицинские эластичные фиксирующие бинты;
- модификация: ленточные;
- способ закрепления: когезивные.

4 РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, ВОЗМОЖНЫХ ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Показания для применения: необходимость фиксации перевязочных средств, компрессов путем самофиксирования (когезивности) на различных частях тела без прямого контакта с открытой раневой поверхностью (однократное применение).

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие.

Возможные побочные эффекты: возникновение аллергической реакции при индивидуальной непереносимости компонентов изделия.

Область применения: может быть использовано пользователями в условиях лечебно-профилактических, амбулаторных учреждений, и в домашних условиях.

Бинт не является стерильным и не предназначен для прямого контакта с поврежденной кожей.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Изделие предназначено для однократного применения, повторному применению не подлежит.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 Внешний вид изделия должен быть:

Изделие не должно иметь видимых дефектов, разрывов (надрывов), складок, загрязнений, посторонних включений, пятен. Кромка должна быть ровной. Изделия скатываются или наматываются на картонные, либо полимерные цилиндрические втулки, диаметр втулки – 25 мм (предельные отклонения ± 2 мм), ширина втулки равна ширине бинта (предельные отклонения ± 10 %).

Внешний вид представлен на рисунке 1.

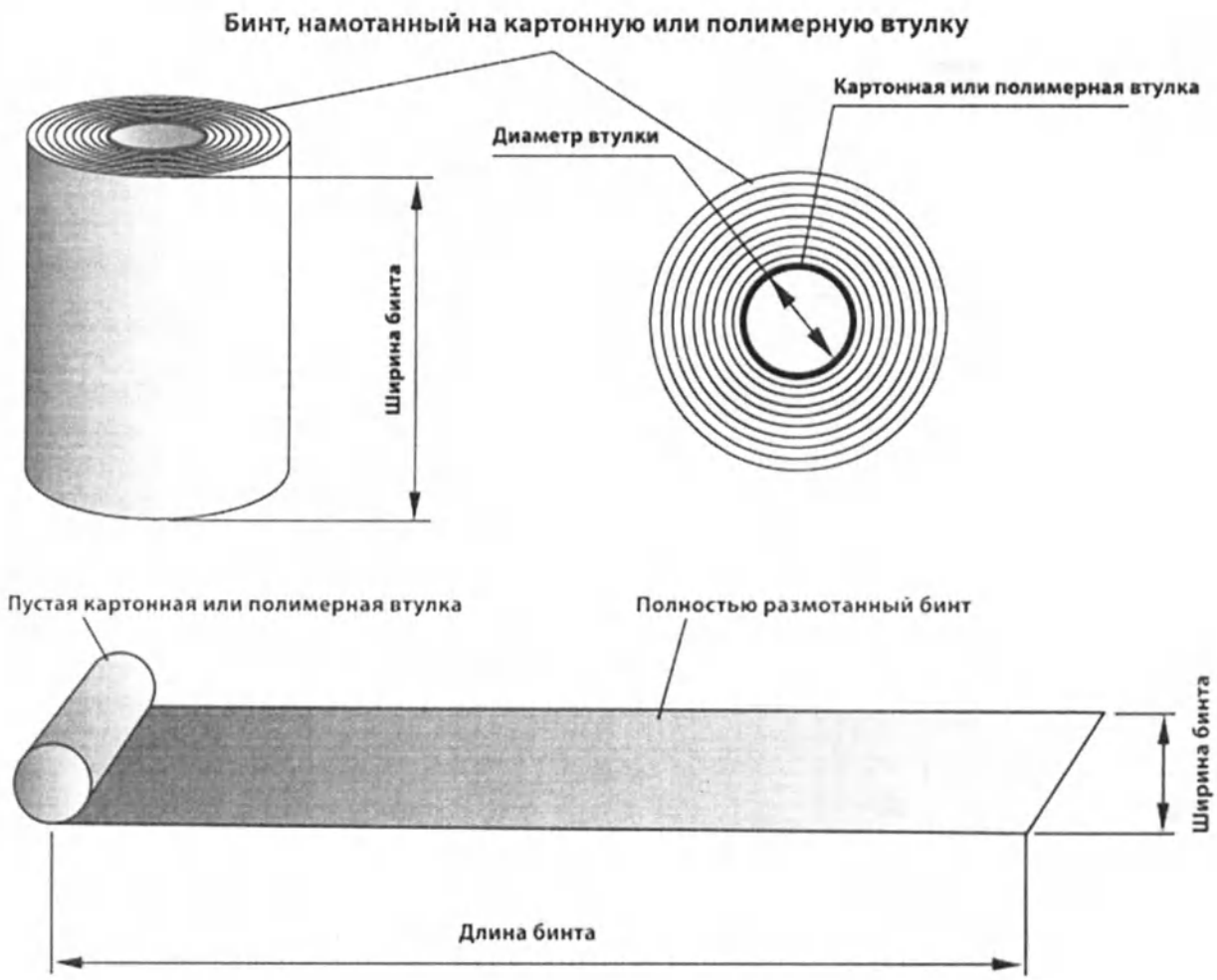


Рисунок 1 – Внешний вид изделия

5.2 Изделие должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в таблицах 1-2.

Таблица 1

Наименование параметра	Требование и норма
Растяжимость, %	от 10 до 150 включ.
Поверхностная плотность, г/м^2	от 40 до 120 включ.
Разрывная нагрузка, Н (кгс)	Не менее 117,6 (12)
Когезионная прочность расслаивания, Н/м	от 15 до 70 включ.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Таблица 2

Наименование	Ширина, см (± 10%)	Фактическая длина в развернутом состоянии (без натяжения), м (± 10%)	Длина в растянутом состоянии, не менее, м	Масса, г (±10%)
Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 2 м х 4 см	4	2	3	8,4
Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 2 м х 6 см	6			12,6
Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 2 м х 8 см	8			16,8
Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 2 м х 10 см	10			21,0
Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 4 м х 4 см	4	4	6	14,4
Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 4 м х 6 см	6			21,6
Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 4 м х 8 см	8			28,8
Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 4 м х 10 см	10			36,0
Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 6 м х 4 см	4	6	9	20,4
Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 6 м х 6 см	6			30,6
Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 6 м х 8 с	8			40,8
Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 6 м х 10 см	10			51,0
Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 8 м х 4 см	4	8	12	26,4
Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 8 м х 6 см	6			39,6
Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 8 м х 8 см	8			52,8
Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 8 м х 10 см	10			64,8
Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 10 м х 4 см	4	10	15	32,4

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 10 м х 6 см	6			48,6
Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 10 м х 8 см	8			64,8
Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 10 м х 10 см	10			81,0
Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 20 м х 4 см	4	20	30	62,4
Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 20 м х 6 см	6			93,6
Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 20 м х 8 см	8			124,8
Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 20 м х 10 см	10			138,0

5.3 Для изготовления изделия должны быть использованы материалы, указанные в таблице 3.

Таблица 3

Наименование сырья	Производитель
Пряжа (вискоза)	ОАО «Гронитекс», ТУ РБ 5000 4653 9.072-2001, РБ
Нить пневмосоединенная (полиамид)	ООО «Проластан», ТУ 22 7229-001-81299908-2007, Россия
Клей-расплав (термопластичный полимер)	ООО «Эрготек», ТУ 2242-016-36449201-2014, Россия
Цилиндрическая втулка (картон)	ООО «Бумажная мануфактура», ТУ 5456-003-00300506-2003, Россия;
Цилиндрическая втулка (полиэтилен высокой плотности)	Pharmaplast S.A.E., Египет

6 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Бинт не является стерильным и не предназначен для прямого контакта с поврежденной кожей.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО использовать на поврежденных кожных покровах и/или на раневых поверхностях.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО повторное применение. Изделие предназначено для однократного применения, повторному применению не подлежит.

ВНИМАНИЕ! Не применять по истечении срока годности.

7 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Способ применения медицинского изделия:

1) Зафиксировать изделие путем оборачивания вокруг части тела пациента, растягивая бинт наполовину его максимальных возможностей.

Каждый оборот бинта должен перекрывать предыдущий наполовину.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Не рекомендуется накладывать бинт слишком туго.

2) После завершения фиксации бинта, его остаток необходимо отрезать.

Внимание!

Не допускается сильного стягивания конечностей, появления физического дискомфорта, нарушения кровообращения;

В случае возникновения дискомфорта и боли при накладывании бинта, при чрезмерном стягивании конечностей, появления аллергических реакций при контакте бинта с кожей, необходимо обратиться к врачу

8 ВЗАИМОДЕЙТСВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся по ТУ 21.20.24-015-14959781-2023 может использоваться совместно со всеми видами медицинских изделий, которые используются при перевязке.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Изделие предназначено для однократного применения. Ремонту и техническому обслуживанию не подлежит.

10 ИНФОРМАЦИЯ О СТЕРИЛЬНОМ СОСТОЯНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, О НАЛИЧИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ ЖИВОТНОГО И (ИЛИ) ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Изделие не является стерильным. При изготовлении изделия не используются лекарственные средства, материалы животного и (или) человеческого происхождения.

11 КОМПЛЕКТНОСТЬ

11.1 В комплект поставки должно входить:

Варианты исполнения

1. Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 2 м х 4 см, в составе:

1.1.Бинт – 1 шт.

1.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

2. Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 2 м х 6 см , в составе:

2.1.Бинт – 1 шт.

2.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

3. Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 2 м х 8 см , в составе:

3.1.Бинт – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

4. Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 2 м х 10 см , в составе:

4.1.Бинт – 1 шт.

4.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

5.Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 4 м х 4 см , в составе:

5.1.Бинт – 1 шт.

5.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

6.Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 4 м х 6 см , в составе:

6.1.Бинт – 1 шт.

6.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

7.Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 4 м х 8 см , в составе:

7.1.Бинт – 1 шт.

7.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

8.Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 4 м х 10 см , в составе:

8.1.Бинт – 1 шт.

8.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

9.Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 6 м х 4 см , в составе:

9.1.Бинт – 1 шт.

9.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

10.Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 6 м х 6 см , в составе:

10.1.Бинт – 1 шт.

10.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

11.Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 6 м х 8 см , в составе:

11.1.Бинт – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

12.Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 6 м х 10 см , в составе:

12.1.Бинт – 1 шт.

12.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

13.Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 8 м х 4 см , в составе:

13.1.Бинт – 1 шт.

13.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

14.Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 8 м х 6 см , в составе:

14.1.Бинт – 1 шт.

14.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 8 м х 8 см , в составе:

15.1.Бинт – 1 шт.

15.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

16.Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 8 м х 10 см , в составе:

16.1.Бинт – 1 шт.

16.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

17.Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 10 м х 4 см , в составе:

17.1.Бинт – 1 шт.

17.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

18.Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 10 м х 6 см , в составе:

18.1.Бинт – 1 шт.

18.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

19.Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 10 м х 8 см , в составе:

19.1.Бинт – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

19.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

20.Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 10 м х 10 см , в составе:

20.1.Бинт – 1 шт.

20.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

21.Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 20 м х 4 см , в составе:

21.1.Бинт – 1 шт.

21.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

22.Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 20 м х 6 см , в составе:

22.1.Бинт – 1 шт.

22.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

23.Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 20 м х 8 см , в составе:

23.1.Бинт – 1 шт.

23.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

24.Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся на вискозной основе, размер 20 м х 10 см , в составе:

24.1.Бинт – 1 шт.

24.2 Инструкция по применению в сокращенном виде, нанесенная на индивидуальную упаковку-1 шт.

11.2 Допускается прикладывать одну инструкцию по применению на одну партию продукции, поставляемую одному пользователю по одному адресу.

11.3 По требованию потребителя производитель предоставляет дополнительные экземпляры инструкции по применению.

11.4 Инструкция по применению может быть представлена в сокращенном виде и частично нанесена на упаковку.

12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортировать изделие следует в транспортной упаковке транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150, в части воздействия климатических факторов при температуре от минус 10°С до плюс 40°С и относительной влажности не выше 98% при температуре +25°С.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

13 ХРАНЕНИЕ

Условия хранения: в крытых сухих помещениях, при температуре от минус 10 С ° до плюс 40 С° и относительной влажности не выше 98% при температуре +25°С. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

Изделия должны храниться отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом и неприятным вкусом, или должны храниться в таре, защищенной от этих паров.

14 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатацию изделия осуществлять в условиях УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

15 МАРКИРОВКА

Маркировка наружной стороны индивидуальной упаковки, должна содержать:

- сведения о производителе: название предприятия, почтовый адрес, телефон/факс, адрес электронной почты, место производства;
- наименование изделия;
- вариант исполнения;
- назначение;
- способ применения;
- противопоказания;
- состав;
- обозначение настоящих технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- дата изготовления (квартал год);
- номер партии;
- срок годности;
- условия хранения;
- способ утилизации (допускается использование символов);
- символ «Запрет на повторное применение»;
- символ «Температурный диапазон»;
- символ «Диапазон влажности»;
- символ «Не допускать воздействия солнечного света»;
- символ «Беречь от влаги»;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению»;
- символ вторичной переработки (петля Мебиуса);
- штриховой идентификационный код (при наличии);

16 РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ

16.1 При маркировке изделия могут быть использованы следующие символы:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	Обратитесь к инструкции по применению
	указание на запрет повторного применения
	Температурный диапазон
	Утилизировать с бытовыми отходами
	Коммерческое обозначение наименования производителя
	Беречь от влаги
	Беречь от солнечных лучей
	символ вторичной переработки (лента Мёбиуса)
	Диапазон влажности

17 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

17.2 Гарантийный срок годности (хранения) - 5 лет с даты изготовления.

18 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

18.1 Изделия утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2020 г. № 3).

18.2 Использованные изделия относятся к отходам класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам (ТБО) и утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

19 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

- ГОСТ Р 58852-2020 «Изделия медицинские эластичные фиксирующие. Общие технические требования. Методы испытаний»
- ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»;
- ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

• ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность»;

• ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

• ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными»;

• ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in vitro»;

• ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

• ГОСТ ISO 10993-12-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы»;

20 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам качества медицинского изделия «Бинт медицинский эластичный самофиксирующийся по ТУ 21.20.24-015-14959781-2023», производства ООО «ЭВТЕКС» обращаться в адрес:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭВТЕКС» (ООО «ЭВТЕКС»).

Юридический адрес: 153000, Ивановская область, г.о. Иваново, г. Иваново, ул. Марии Рябининой, д. 5, офис 8, 9.

Адрес производства: 153025, Ивановская область, г. Тейково, ул. Западная, д.8.

Контактные телефоны: +7 (495) 707 10 09

E-mail: evers@evers.ru.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито пронумеровано и скреплено печатью 12 (двенадцать) лист(ов).

Директор ООО «ЭВТЕКС»

_____/ Бобылев С.В.

«__» октября 2024 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU