

ЗАО «СТЕРИН», Россия, 140500, Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, 8 км
Sterin
Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов ПР 23-01 с регулятором тока жидкости
ТУ 9444-007-11701993-2014

STERILE EO



Игла инъекционная: 1,2x40 мм

- Стерильно внутри, апиrogenно, нетоксично
- Не применять при нарушении целостности потребительской упаковки
- После использования уничтожить

Способ применения:

Перед применением необходимо проверить срок годности и целостность потребительской упаковки, закрыть роликовый зажим, ввести полимерную иглу устройства в полимерный контейнер (стеклянную бутылку). Далее заполнить капел-ницу до половины и открыть зажим и выпустить воздух, закрыть зажим. После проведения венопункции, регулятором тока жидкости (для точной дозировки) и зажимом установить необходимую скорость потока.

ПАРТИЯ №: 438266
Годен до 10/2015

AK®

Сделано в России
Подорожная упаковка
не используется!

ПАР коричневый
= простерилизовано

250 мм

ПИК  ПАК®


10 коричневый
= простерилизовано



ФОРМ зелёный
= простерилизовано




30 корични
= простерилиз

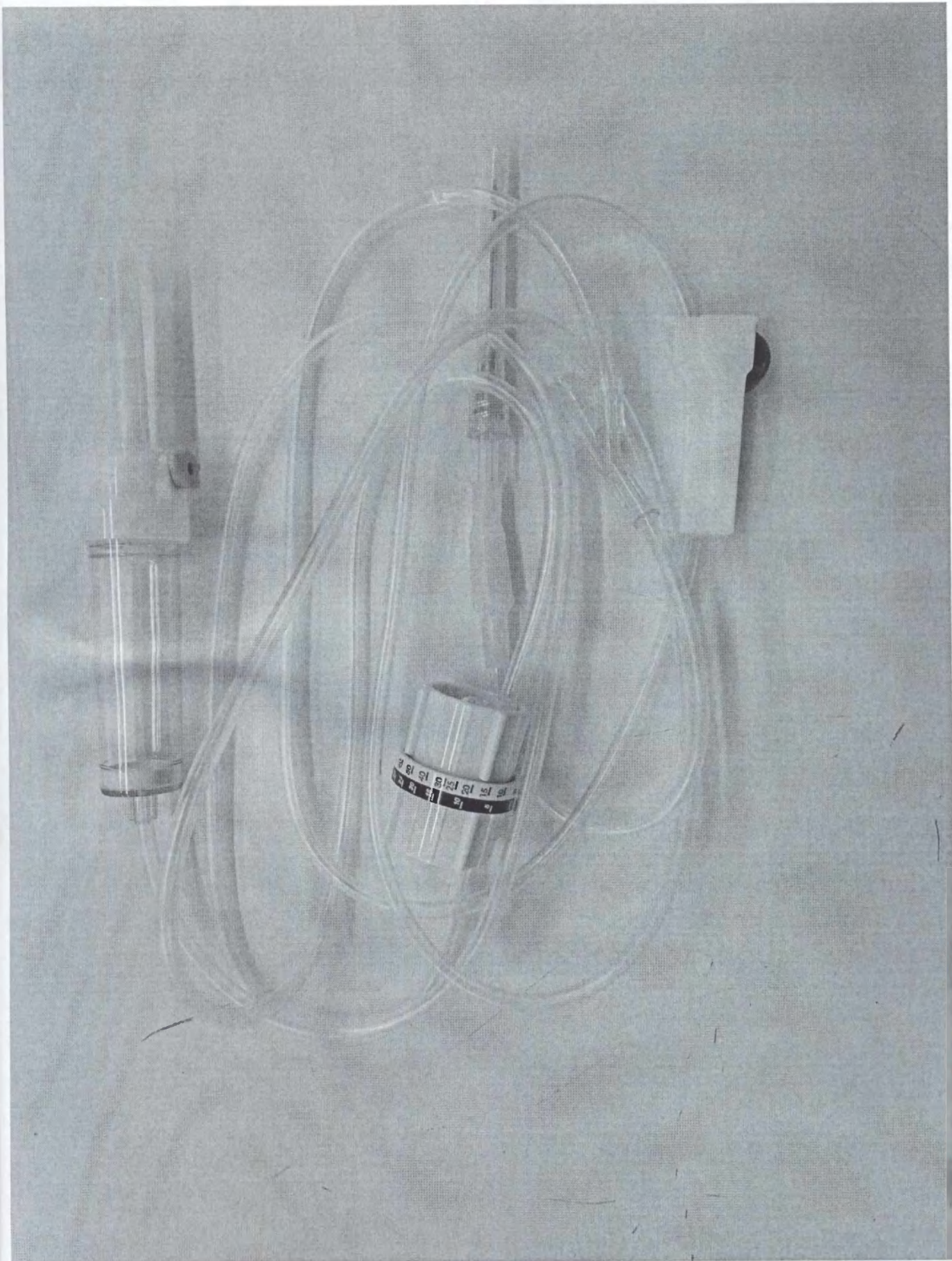



Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью 3 листов.

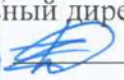Генеральный директор
 Ю.Н. Желонкин