

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «НПФ «МЕДИКОН»



С. А. Захаров

«6» августа 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Контейнер медицинский для стерилизации КС – «МЕДИКОН» с
принадлежностями по ТУ 32.50.50-008-27846954-2024

2024

Оглавление

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	3
2. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	7
3. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	8
4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	8
5. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ	8
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАНИЙ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ И ВОЗМОЖНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ.....	8
7. ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	8
8. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	23
9. МАТЕРИАЛЫ.....	30
10. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	30
11. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	31
12. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА	33
13. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	34
14. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	35
15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	35
16. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	35
17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ	36
18. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	38
19. РЕКЛАМАЦИЯ.....	38

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Контейнер медицинский для стерилизации КС – «МЕДИКОН» с принадлежностями по ТУ32.50.50-008-27846954-2024 (далее по тексту – далее «Изделие», «Контейнеры», «Контейнеры с принадлежностями», «Медицинское изделие»):

I. Контейнер медицинский универсальный КМУ-«МЕДИКОН», варианты исполнения: КМУ 501-01-80-«МЕДИКОН»; КМУ 501-01-400-«МЕДИКОН»; КМУ 501-02-55-«МЕДИКОН»; КМУ 501-02-85-«МЕДИКОН»; КМУ 501-02-100-«МЕДИКОН»; КМУ 501-02-135-«МЕДИКОН»; КМУ 501-02-150-«МЕДИКОН»; КМУ 501-02-200-«МЕДИКОН»; КМУ 501-02-260-«МЕДИКОН»; КМУ 501-03-55-«МЕДИКОН»; КМУ 501-03-85-«МЕДИКОН»; КМУ 501-03-100-«МЕДИКОН»; КМУ 501-03-135-«МЕДИКОН»; КМУ 501-03-150-«МЕДИКОН»; КМУ 501-03-200-«МЕДИКОН»; КМУ 501-03-260-«МЕДИКОН»; КМУ 501-04-55-«МЕДИКОН»; КМУ 501-04-85-«МЕДИКОН»; КМУ 501-04-100-«МЕДИКОН»; КМУ 501-04-135-«МЕДИКОН»; КМУ 501-04-150-«МЕДИКОН»; КМУ 501-04-200-«МЕДИКОН»; КМУ 501-04-260-«МЕДИКОН»; КМУ 501-05-55-«МЕДИКОН»; КМУ 501-05-85-«МЕДИКОН»; КМУ 501-05-100-«МЕДИКОН»; КМУ 501-05-135-«МЕДИКОН»; КМУ 501-05-150-«МЕДИКОН»; КМУ 501-05-200-«МЕДИКОН»; КМУ 501-05-260-«МЕДИКОН»; КМУ 501-06-120-«МЕДИКОН»; КМУ 501-06-150-«МЕДИКОН»; КМУ 501-06-180-«МЕДИКОН»; КМУ 501-07-120-«МЕДИКОН»; КМУ 501-07-150-«МЕДИКОН»; КМУ 501-07-180-«МЕДИКОН» - 1 шт.;

Принадлежности:

1. Лоток инструментальный с крышкой ЛИ-«МЕДИКОН», варианты исполнения: ЛИ 528-01-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-01-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-01-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-01-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-01-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-02-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-02-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-02-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-02-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-02-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-03-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-03-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-03-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-03-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-03-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-03-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-03-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-03-170-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-03-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-04-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-04-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-04-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-04-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-04-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-05-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-05-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-05-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-05-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-05-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-06-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-06-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-06-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-06-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-06-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-07-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-07-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-07-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-07-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-07-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-07-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-07-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-07-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-08-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-08-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-08-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-08-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-08-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-08-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-08-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-08-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-09-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-09-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-09-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-09-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-09-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-09-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-09-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-09-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-10-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-10-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-10-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-10-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-10-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-10-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-10-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-10-170-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-10-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-11-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-11-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-11-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-11-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-11-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-11-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-11-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-11-170-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-11-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-12-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-12-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-12-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-12-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-12-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-12-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-12-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-12-170-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-12-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-13-30-«МЕДИКОН»;

ЛИ 528-13-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-13-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-13-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-13-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-14-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-14-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-14-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-14-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-14-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-14-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-14-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-14-170-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-14-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-15-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-15-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-15-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-15-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-15-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-15-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-15-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-15-170-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-15-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-16-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-16-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-16-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-16-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-16-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-16-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-16-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-16-170-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-16-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-17-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-17-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-17-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-17-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-17-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-17-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-17-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-17-170-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-17-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-18-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-18-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-18-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-18-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-18-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-18-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-18-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-18-170-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-18-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-19-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-19-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-19-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-19-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-19-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-19-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-19-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-19-170-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-19-200-«МЕДИКОН» - 1-3 шт. (при необходимости);

2. Крышка защитная ЗКр-«МЕДИКОН», варианты исполнения: ЗКр 529-01-«МЕДИКОН»; ЗКр 529-02-«МЕДИКОН»; ЗКр 529-03-«МЕДИКОН»; ЗКр 529-04-«МЕДИКОН»; ЗКр 529-05-«МЕДИКОН»; ЗКр 529-06-«МЕДИКОН» - 1 шт. (при необходимости);

3. Корпус контейнера ККУ-«МЕДИКОН», варианты исполнения: ККУ 524-01-65-«МЕДИКОН»; ККУ 524-01-385-«МЕДИКОН»; ККУ 524-02-40-«МЕДИКОН»; ККУ 524-02-70-«МЕДИКОН»; ККУ 524-02-85-«МЕДИКОН»; ККУ 524-02-120-«МЕДИКОН»; ККУ 524-02-135-«МЕДИКОН»; ККУ 524-02-185-«МЕДИКОН»; ККУ 524-02-245-«МЕДИКОН»; ККУ 524-03-40-«МЕДИКОН»; ККУ 524-03-70-«МЕДИКОН»; ККУ 524-03-85-«МЕДИКОН»; ККУ 524-03-120-«МЕДИКОН»; ККУ 524-03-135-«МЕДИКОН»; ККУ 524-03-185-«МЕДИКОН»; ККУ 524-03-245-«МЕДИКОН»; ККУ 524-04-40-«МЕДИКОН»; ККУ 524-04-70-«МЕДИКОН»; ККУ 524-04-85-«МЕДИКОН»; ККУ 524-04-120-«МЕДИКОН»; ККУ 524-04-135-«МЕДИКОН»; ККУ 524-04-185-«МЕДИКОН»; ККУ 524-04-245-«МЕДИКОН»; ККУ 524-05-40-«МЕДИКОН»; ККУ 524-05-70-«МЕДИКОН»; ККУ 524-05-85-«МЕДИКОН»; ККУ 524-05-120-«МЕДИКОН»; ККУ 524-05-135-«МЕДИКОН»; ККУ 524-05-185-«МЕДИКОН»; ККУ 524-05-245-«МЕДИКОН»; ККУ 524-06-105-«МЕДИКОН»; ККУ 524-06-135-«МЕДИКОН»; ККУ 524-06-165-«МЕДИКОН»; ККУ 524-07-105-«МЕДИКОН»; ККУ 524-07-135-«МЕДИКОН»; ККУ 524-07-165-«МЕДИКОН» - 1 шт. (при необходимости);

4. Крышка контейнера КрУ-«МЕДИКОН», варианты исполнения: КрУ 521-01-«МЕДИКОН»; КрУ 521-02-«МЕДИКОН»; КрУ 521-03-«МЕДИКОН»; КрУ 521-04-«МЕДИКОН»; КрУ 521-05-«МЕДИКОН»; КрУ 521-06-«МЕДИКОН»; КрУ 521-07-«МЕДИКОН» - 1 шт. (при необходимости);

5. Фильтр стерилизационный круглый ФКр-«МЕДИКОН», варианты исполнения: ФКр 530-01-«МЕДИКОН» - не более 100 шт. (при необходимости);

6. Держатель фильтра круглый ДФКр-«МЕДИКОН», варианты исполнения: ДФКр 526-01-«МЕДИКОН» - 1-3 шт.;

II. Контейнер медицинский с клапаном КМК-«МЕДИКОН», варианты исполнения: КМК 502-01-115-«МЕДИКОН»; КМК 502-01-150-«МЕДИКОН»; КМК 502-01-165-«МЕДИКОН»; КМК 502-01-215-«МЕДИКОН»; КМК 502-01-275-«МЕДИКОН»; КМК

502-02-115-«МЕДИКОН»; КМК 502-02-150-«МЕДИКОН»; КМК 502-02-165-«МЕДИКОН»; КМК 502-02-215-«МЕДИКОН»; КМК 502-02-275-«МЕДИКОН»; КМК 502-03-115-«МЕДИКОН»; КМК 502-03-150-«МЕДИКОН»; КМК 502-03-165-«МЕДИКОН»; КМК 502-03-215-«МЕДИКОН»; КМК 502-03-275-«МЕДИКОН»; КМК 502-04-115-«МЕДИКОН»; КМК 502-04-150-«МЕДИКОН»; КМК 502-04-165-«МЕДИКОН»; КМК 502-04-215-«МЕДИКОН»; КМК 502-04-275-«МЕДИКОН»; КМК 502-05-135-«МЕДИКОН»; КМК 502-05-165-«МЕДИКОН»; КМК 502-05-195-«МЕДИКОН»; КМК 502-06-135-«МЕДИКОН»; КМК 502-06-165-«МЕДИКОН»; КМК 502-06-195-«МЕДИКОН» - 1 шт.;

Принадлежности:

1. Крышка контейнера с клапаном КрК-«МЕДИКОН», варианты исполнения: КрК 522-01-«МЕДИКОН»; КрК 522-02-«МЕДИКОН»; КрК 522-03-«МЕДИКОН»; КрК 522-04-«МЕДИКОН»; КрК 522-05-«МЕДИКОН»; КрК 522-06-«МЕДИКОН» - 1 шт. (при необходимости);

2. Корпус контейнера ККУ-«МЕДИКОН», варианты исполнения: ККУ 524-01-65-«МЕДИКОН»; ККУ 524-01-385-«МЕДИКОН»; ККУ 524-02-40-«МЕДИКОН»; ККУ 524-02-70-«МЕДИКОН»; ККУ 524-02-85-«МЕДИКОН»; ККУ 524-02-120-«МЕДИКОН»; ККУ 524-02-135-«МЕДИКОН»; ККУ 524-02-185-«МЕДИКОН»; ККУ 524-02-245-«МЕДИКОН»; ККУ 524-03-40-«МЕДИКОН»; ККУ 524-03-70-«МЕДИКОН»; ККУ 524-03-85-«МЕДИКОН»; ККУ 524-03-120-«МЕДИКОН»; ККУ 524-03-135-«МЕДИКОН»; ККУ 524-03-185-«МЕДИКОН»; ККУ 524-03-245-«МЕДИКОН»; ККУ 524-04-40-«МЕДИКОН»; ККУ 524-04-70-«МЕДИКОН»; ККУ 524-04-85-«МЕДИКОН»; ККУ 524-04-120-«МЕДИКОН»; ККУ 524-04-135-«МЕДИКОН»; ККУ 524-04-185-«МЕДИКОН»; ККУ 524-04-245-«МЕДИКОН»; ККУ 524-05-40-«МЕДИКОН»; ККУ 524-05-70-«МЕДИКОН»; ККУ 524-05-85-«МЕДИКОН»; ККУ 524-05-120-«МЕДИКОН»; ККУ 524-05-135-«МЕДИКОН»; ККУ 524-05-185-«МЕДИКОН»; ККУ 524-05-245-«МЕДИКОН»; ККУ 524-06-105-«МЕДИКОН»; ККУ 524-06-135-«МЕДИКОН»; ККУ 524-06-165-«МЕДИКОН»; ККУ 524-07-105-«МЕДИКОН»; ККУ 524-07-135-«МЕДИКОН»; ККУ 524-07-165-«МЕДИКОН» - 1 шт. (при необходимости);

3. Лоток инструментальный с крышкой ЛИ-«МЕДИКОН», варианты исполнения: ЛИ 528-01-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-01-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-01-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-01-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-01-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-02-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-02-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-02-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-02-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-02-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-03-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-03-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-03-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-03-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-03-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-03-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-03-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-03-170-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-03-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-04-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-04-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-04-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-04-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-04-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-05-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-05-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-05-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-05-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-05-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-06-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-06-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-06-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-06-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-06-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-07-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-07-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-07-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-07-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-07-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-07-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-07-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-07-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-08-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-08-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-08-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-08-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-08-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-08-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-08-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-08-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-09-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-09-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-09-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-09-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-09-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-09-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-09-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-09-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-10-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-10-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-10-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-10-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-10-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-10-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-10-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-10-170-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-10-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-11-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-

11-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-11-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-11-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-11-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-11-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-11-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-11-170-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-11-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-12-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-12-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-12-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-12-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-12-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-12-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-12-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-12-170-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-12-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-13-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-13-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-13-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-13-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-13-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-14-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-14-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-14-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-14-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-14-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-14-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-14-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-14-170-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-14-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-15-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-15-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-15-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-15-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-15-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-15-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-15-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-15-170-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-15-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-16-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-16-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-16-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-16-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-16-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-16-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-16-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-16-170-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-16-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-17-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-17-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-17-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-17-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-17-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-17-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-17-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-17-170-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-17-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-18-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-18-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-18-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-18-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-18-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-18-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-18-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-18-170-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-18-200-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-19-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-19-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-19-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-19-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-19-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-19-130-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-19-150-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-19-170-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-19-200-«МЕДИКОН» - 1-3 шт. (при необходимости);

III. Контейнер медицинский специальный КМС-«МЕДИКОН», варианты исполнения: КМС 503-01-55-«МЕДИКОН»; КМС 503-01-90-«МЕДИКОН»; КМС 503-01-120-«МЕДИКОН»; КМС 503-02-50-«МЕДИКОН»; КМС 503-02-70-«МЕДИКОН»; КМС 503-02-100-«МЕДИКОН»; КМС 503-03-40-«МЕДИКОН»; КМС 503-03-65-«МЕДИКОН»; КМС 503-03-80-«МЕДИКОН»; КМС 503-03-100-«МЕДИКОН»; КМС 503-03-130-«МЕДИКОН»; КМС 503-04-70-«МЕДИКОН»; КМС 503-04-90-«МЕДИКОН» - 1 шт.;

Принадлежности:

1. Крышка контейнера специального КрС-«МЕДИКОН», варианты исполнения: КрС 523-01-«МЕДИКОН»; КрС 523-02-«МЕДИКОН»; КрС 523-03-«МЕДИКОН»; КрС 523-04-«МЕДИКОН» - 1 шт. (при необходимости);

2. Корпус контейнера специального КС-«МЕДИКОН», варианты исполнения: КС 525-01-45-«МЕДИКОН»; КС 525-01-70-«МЕДИКОН»; КС 525-01-100-«МЕДИКОН»; КС 525-02-40-«МЕДИКОН»; КС 525-02-60-«МЕДИКОН»; КС 525-02-90-«МЕДИКОН»; КС 525-03-30-«МЕДИКОН»; КС 525-03-55-«МЕДИКОН»; КС 525-03-70-«МЕДИКОН»; КС 525-03-90-«МЕДИКОН»; КС 525-03-120-«МЕДИКОН»; КС 525-04-60-«МЕДИКОН»; КС 525-04-80-«МЕДИКОН» - 1 шт. (при необходимости);

3. Лоток инструментальный с крышкой ЛИ-«МЕДИКОН», варианты исполнения: ЛИ 528-01-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-01-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-01-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-01-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-01-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-02-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-02-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-02-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-02-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-02-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-04-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-04-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-04-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-04-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-04-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-05-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-05-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-05-60-«МЕДИКОН»;

ЛИ 528-05-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-05-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-06-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-06-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-06-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-06-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-06-100-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-07-30-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-07-50-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-07-60-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-07-70-«МЕДИКОН»; ЛИ 528-07-100-«МЕДИКОН»; - 1 шт. (при необходимости);

4. Фильтр стерилизационный прямоугольный ФПр-«МЕДИКОН», варианты исполнения: ФПр 531-01-«МЕДИКОН»; ФПр 531-02-«МЕДИКОН» - не более 100 шт. (при необходимости);

5. Держатель фильтра прямоугольный ДФПр-«МЕДИКОН», варианты исполнения: ДФПр 527-01-«МЕДИКОН»; ДФПр 527-02-«МЕДИКОН» - 1-3 шт.;

IV. Контейнер плоский КПл-«МЕДИКОН», варианты исполнения: КПл 504-01-25-«МЕДИКОН»; КПл 504-01-35-«МЕДИКОН»; КПл 504-01-45-«МЕДИКОН»; КПл 504-02-25-«МЕДИКОН»; КПл 504-02-35-«МЕДИКОН»; КПл 504-02-45-«МЕДИКОН»; КПл 504-03-25-«МЕДИКОН»; КПл 504-03-35-«МЕДИКОН»; КПл 504-03-45-«МЕДИКОН»; КПл 504-04-25-«МЕДИКОН»; КПл 504-04-35-«МЕДИКОН»; КПл 504-04-45-«МЕДИКОН»; КПл 504-05-30-«МЕДИКОН»; КПл 504-05-40-«МЕДИКОН»; КПл 504-05-50-«МЕДИКОН»; КПл 504-05-60-«МЕДИКОН»; КПл 504-05-70-«МЕДИКОН»; КПл 504-05-80-«МЕДИКОН»; КПл 504-05-90-«МЕДИКОН»; КПл 504-05-100-«МЕДИКОН»; КПл 504-06-30-«МЕДИКОН»; КПл 504-06-50-«МЕДИКОН»; КПл 504-06-90-«МЕДИКОН»; КПл 504-06-120-«МЕДИКОН»; КПл 504-07-30-«МЕДИКОН»; КПл 504-07-50-«МЕДИКОН»; КПл 504-07-90-«МЕДИКОН»; КПл 504-07-120-«МЕДИКОН»; КПл 504-08-30-«МЕДИКОН»; КПл 504-08-40-«МЕДИКОН»; КПл 504-08-50-«МЕДИКОН»; КПл 504-08-60-«МЕДИКОН»; КПл 504-08-70-«МЕДИКОН»; КПл 504-08-80-«МЕДИКОН»; КПл 504-08-90-«МЕДИКОН»; КПл 504-08-100-«МЕДИКОН»; КПл 504-09-30-«МЕДИКОН»; КПл 504-09-40-«МЕДИКОН»; КПл 504-09-50-«МЕДИКОН»; КПл 504-10-60-«МЕДИКОН»; КПл 504-10-75-«МЕДИКОН»; КПл 504-10-90-«МЕДИКОН»; КПл 504-11-40-«МЕДИКОН»; КПл 504-11-60-«МЕДИКОН»; КПл 504-11-90-«МЕДИКОН»; КПл 504-11-120-«МЕДИКОН»; КПл 504-12-80-«МЕДИКОН»; КПл 504-12-100-«МЕДИКОН» - 1 шт.;

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «МЕДИКОН» (ООО «НПФ «МЕДИКОН»)

Юридический адрес: 420037, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. СИМОНОВА, Д. 14/41, ПОМЕЩ. 3Н

Место производства: 422527, Россия, Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение, территория Промышленная площадка Индустриальный Парк М7, 45

Телефон: +7 (843) 528-28-09

E-mail: medicon@bk.ru

3. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Медицинское изделие предназначено для размещения, транспортировки и хранения в них медицинских изделий; для стерилизации медицинских изделий паровым методом (автоклавированием).

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Специализированные отделения медицинских лечебных и лечебно-профилактических учреждений.

5. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Медицинские работники, задействованные в процессе стерилизации медицинских изделий и организации проведения операций и медицинских манипуляций.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАНИЙ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ И ВОЗМОЖНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ

Показания к применению медицинского изделия: использовать медицинское изделие согласно его назначению.

Противопоказания к применению медицинского изделия: противопоказания не выявлены. Не применять не по назначению.

Возможные побочные эффекты – отсутствуют.

7. ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Контейнер медицинский универсальный КМУ-«МЕДИКОН»: предназначен для стерилизации методом автоклавирования, хранения и транспортировки медицинского инструмента.

Контейнер состоит из корпуса и перфорированной крышки с фильтром. К крышке в области перфорации изнутри с помощью держателя фильтра фиксируется сам фильтр, по периметру крышки имеется силиконовый уплотнитель. Область перфорации имеет форму окружности, фильтр также имеет форму круга.

В процессе стерилизации паром в автоклаве через перфорацию в крышке и фильтр пар проникает в контейнер, где при заданных режимах происходит стерилизация медицинских инструментов.

Контейнер оснащен двумя ручками для удобства переноса, двумя замками для надежной фиксации крышки.

Контейнер медицинский с клапаном КМК-«МЕДИКОН»: предназначен для стерилизации методом автоклавирования, хранения и транспортировки медицинского инструмента.

Контейнер состоит из корпуса и крышки с встроенным клапаном. В отличие от контейнеров с фильтром, не требует расходных материалов.

Клапан устроен таким образом, что в нормальных окружающих условиях остается закрытым, а при достижении разницы между давлением внутри контейнера и в автоклаве он открывается, позволяя выпускать пар в процессе стерилизации и выпускать излишки воздуха на стадии извлечения контейнера из стерилизатора.

Контейнер оснащен двумя ручками для удобства переноса, двумя замками для надежной фиксации крышки.

Контейнер медицинский специальный КМС-«МЕДИКОН»: предназначен для стерилизации методом автоклавирования, хранения и транспортировки мелкого медицинского инструмента. Конструктивно практически ничем не отличается от Контейнера медицинского универсального КМУ-«МЕДИКОН».

Контейнер состоит из корпуса и перфорированной крышки с фильтром. К крышке в области перфорации изнутри с помощью держателя фильтра фиксируется сам фильтр, по периметру крышки имеется силиконовый уплотнитель. Область перфорации прямоугольной формы, фильтр также имеет прямоугольную форму.

В процессе стерилизации паром в автоклаве через перфорацию в крышке и фильтр пар проникает в контейнер, где при заданных режимах происходит стерилизация медицинских инструментов.

Контейнер оснащен двумя ручками для удобства переноса, двумя замками для надежной фиксации крышки.

Контейнер плоский КПл-«МЕДИКОН»: предназначен для размещения, транспортировки и хранения медицинских инструментов и стерильных материалов, проведения стерилизации в автоклаве в комплекте с контейнером медицинским универсальным КМУ-«МЕДИКОН», контейнером медицинским с клапаном КМК-«МЕДИКОН».

Крышка контейнера может быть закреплена на корпусе на осях, также может быть съемной. И крышка, и корпус имеют перфорацию. Замок на контейнере препятствует самопроизвольному открыванию крышки.

Защитная крышка ЗКр-«МЕДИКОН»: предназначена для дополнительной защиты сменных фильтров в Контейнерах медицинских универсальных КМУ-«МЕДИКОН»,

которая с небольшим зазором одевается поверх перфорированной крышки на контейнер КМУ-«МЕДИКОН».

Защитная крышка защищает контейнер сверху. Конструкция воздушных щелей у защитной крышки предотвращает оседание пыли на фильтре во время хранения и не мешает процессу стерилизации. Надежно защищает сменные фильтры от случайных механических повреждений (например, острые края инструментов).

На защитной крышке имеется замок по типу «защелка», что даст легкую и надежную фиксацию на перфорированной крышке.

Лоток инструментальный с крышкой ЛИ-«МЕДИКОН»: предназначен для размещения, транспортировки и хранения медицинских инструментов и стерильных материалов при стерилизации в автоклаве в комплекте с контейнером медицинским универсальным КМУ-«МЕДИКОН», контейнером медицинским с клапаном КМК-«МЕДИКОН», контейнером медицинским специальным КМС-«МЕДИКОН».

Крышка лотка закреплена на корпусе.

Корпус и крышка имеют перфорацию. Лоток оснащен двумя падающими ручками для удобства переноса, замком для надежной фиксации крышки.

Держатель фильтра круглый ДФКр-«МЕДИКОН», держатель фильтра прямоугольный ДФПр-«МЕДИКОН»: представляет собой круглое перфорированное изделие (для круглых фильтров с Контейнером медицинским универсальным КМУ-«МЕДИКОН») или прямоугольное перфорированное изделие (для прямоугольных фильтров с Контейнером медицинским специальным КМС-«МЕДИКОН»).

Держатель фильтра оснащен силиконовым уплотнителем, чтобы пар циркулировал только сквозь фильтр. Имеет надежную фиксирующую защелку.


Фильтр стерилизационный круглый ФКр-«МЕДИКОН», фильтр стерилизационный прямоугольный ФПр-«МЕДИКОН»: представляет собой круглое или прямоугольное изделие из медицинской бумаги, либо текстиля. Сменные фильтры из медицинской бумаги предназначены для одноразового использования (проведения одного цикла стерилизации), текстильные фильтры могут использоваться до 60 циклов. Фильтр фиксируется с помощью держателя фильтра, обеспечивая его герметичное прилегание к поверхности крышки.

Контейнеры с принадлежностями соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444-2020, настоящих технических условий и комплектов документации согласно таблице 1.

Таблица 1 - Варианты исполнения Изделия

Исполнение	Наименование изделия	Обозначение комплекта документации
КМУ-«МЕДИКОН»	Контейнер медицинский универсальный	ИПОС.942319.501
КМК-«МЕДИКОН»	Контейнер медицинский с клапаном	ИПОС.942319.502
КМС-«МЕДИКОН»	Контейнер медицинский специальный	ИПОС.942319.503
КПл-«МЕДИКОН»	Контейнер плоский	ИПОС.942319.504
Принадлежности:		
КрУ-«МЕДИКОН»	Крышка контейнера	ИПОС.942319.521
КрК-«МЕДИКОН»	Крышка контейнера с клапаном	ИПОС.942319.522
КрС-«МЕДИКОН»	Крышка контейнера специального	ИПОС.942319.523
ККУ-«МЕДИКОН»	Корпус контейнера	ИПОС.942319.524
КС-«МЕДИКОН»	Корпус контейнера специального	ИПОС.942319.525
ДФКр-«МЕДИКОН»	Держатель фильтра круглый	ИПОС.942319.526
ДФПр-«МЕДИКОН»	Держатель фильтра прямоугольный	ИПОС.942319.527
ЛИ-«МЕДИКОН»	Лоток инструментальный с крышкой	ИПОС.942319.528
ЗКр-«МЕДИКОН»	Крышка защитная	ИПОС.942319.529
ФКр-«МЕДИКОН»	Фильтр стерилизационный круглый	ИПОС.942319.530
ФПр-«МЕДИКОН»	Фильтр стерилизационный прямоугольный	ИПОС.942319.531

Габаритные размеры, масса и максимальная рабочая нагрузка контейнеров и принадлежностей к ним указаны в таблицах на рисунках 1-15.

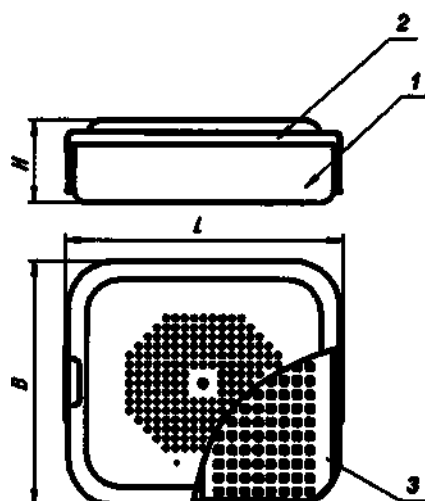


- 1 - Корпус контейнера КУ-«МЕДИКОН» (см. рис. 8)
 2 - Крышка контейнера КУ-«МЕДИКОН» (см. рис. 5)
 3 - Лоток инструментальный с крышкой /И «МЕДИКОН» (см. рис. 12)

Вариант исполнения	L, мм		B, мм		H, мм		Масса кг, не более	Макс. работ- чая нагруз- ка, кг
КМУ 501-01-80- «МЕДИКОН»; -01-400	245	±30,0	230	±30,0	80-400 [*]	±10,0	7,8	10,5
-02-55; -02-85; -02-100; -02-135; -02-150; -02-200; -02-260	310	±30,0	280	±30,0	55+260 [*]	±10,0	5,9	7,0
-03-55; -03-85; -03-100; - 03-135; -03-150; -03-200; -03-260	370	±30,0	250	±30,0	55+260 [*]	±10,0	6,5	8,3
-04-55; -04-85; -04-100; - 04-135; -04-150; -04-200; -04-260	475	±30,0	280	±30,0	55+260 [*]	±10,0	8,3	10,0
-05-55; -05-85; -05-100; - 05-135; -05-150; -05-200; -05-260	600	±30,0	280	±30,0	55+260 [*]	±10,0	9,5	12,0
-06-120; -06-150; -06-180	600	±30,0	400	±30,0	120+180 [*]	±10,0	10,5	13,0
-07-120; -07-150; -07-180	720	±30,0	280	±30,0	120+180 [*]	±10,0	12,0	14,0

^{*}Для вариантов исполнения, имеющих изменяемую высоту, последняя группа цифр обозначения варианта исполнения соответствует высоте

Рисунок 1. Контейнер медицинский универсальный КМУ-«МЕДИКОН». Габаритные размеры.

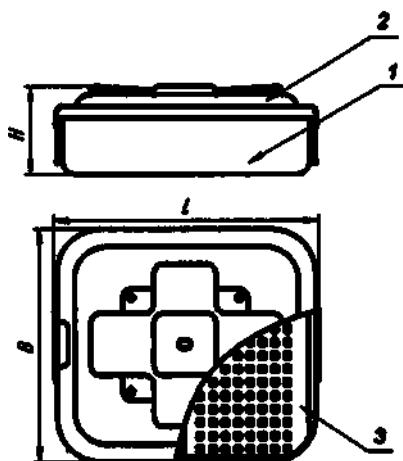


- 1 - Корпус контейнера КУ-«МЕДИКОН» (см. рис. 8)
 2 - Крышка контейнера с клапаном КрК-«МЕДИКОН» (см. рис. 6)
 3 - Лоток инструментальный с крышкой ЛИ «МЕДИКОН» (см. рис. 12)

Вариант исполнения	L, мм		B, мм		H, мм		Масса кг, не более	Макс. рабочая нагрузка, кг
КМК 502-01-115- «МЕДИКОН»; 01-150; -01-165; -01-215; -01-275	310	±30,0	280	±30,0	115+275 *	±10, 0	6,9	7,0
-02-115; -02-150; -02- 165; -02-215; -02- 275	370	±30,0	250	±30,0	115+275 *	±10, 0	7,5	8,3
-03-115; -03-150; -03- 165; -03-215; -03- 275	475	±30,0	280	±30,0	115+275 *	±10, 0	9,3	10,0
-04-115; -04-150; -04- 165; -04-215; -04- 275	600	±30,0	280	±30,0	115+275 *	±10, 0	10,5	12,0
-05-135; -05-165; -05-195	600	±30,0	400	±30,0	135+195 *	±10, 0	11,5	13,0
-06-135; -06-165; -06-195	720	±30,0	280	±30,0	135+195 *	±10, 0	13,0	14,0

*Для вариантов исполнения, имеющих изменяемую высоту, последняя группа цифр обозначения варианта исполнения соответствует высоте

Рисунок 2. Контейнер медицинский с клапаном КМК-«МЕДИКОН». Габаритные размеры.

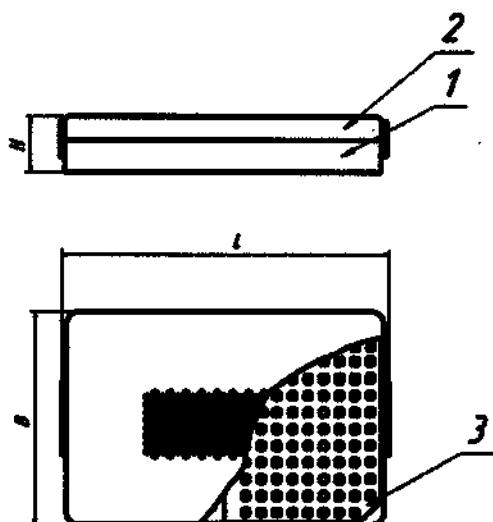


- 1 - Корпус контейнера специального КС-«МЕДИКОН» (см. рис. 9)
 2 - Крышка контейнера специального КС-«МЕДИКОН» (см. рис. 7)
 3 - Лоток инструментальный с крышкой ЛН «МЕДИКОН» (см. рис. 12)

Вариант исполнения	L, мм		B, мм		H, мм		Масса кг, не более	Макс. работ- чая на- груз- ка, кг
КМС 503-01-55- «МЕДИКОН»; -01-90; - 01-120	220	±30,0	150	±30,0	55+120*	±10,0	3,0	4,8
-02-50; -02-70; -02-100	300	±30,0	140	±30,0	50+100*	±10,0	4,0	5,8
-03-40; -03-65; -03-80; - 03-100; -03-130	310	±30,0	190	±30,0	40+130*	±10,0	4,4	6,2
-04-70; -04-90	530	±30,0	150	±30,0	70+90*	±10,0	5,2	7,0

*Для вариантов исполнения, имеющих изменяемую высоту, последняя группа цифр обозначения варианта исполнения соответствует высоте

Рисунок 3. Контейнер медицинский специальный КМС-«МЕДИКОН». Габаритные размеры.


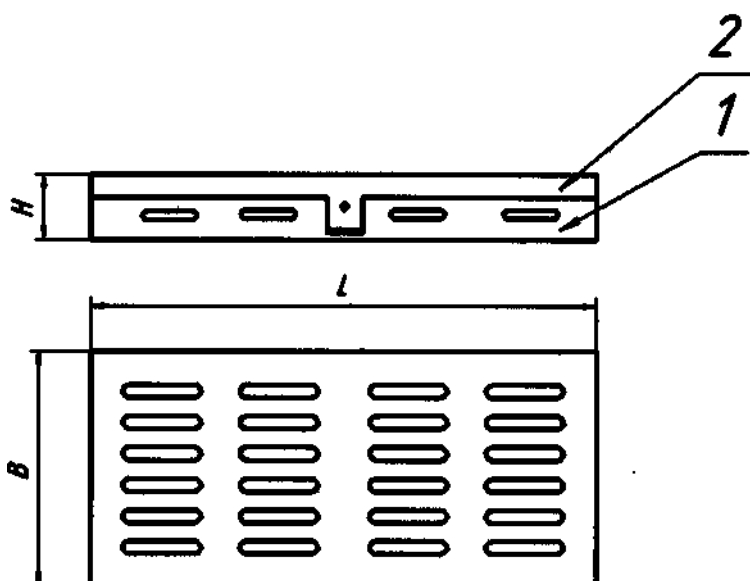


- 1 - Корпус
 2 - Крышка

Вариант исполнения	L, мм		B, мм		H, мм		Масса кг, не более	Макс рабо чая нагр узка, кг
КПл 504-01-25- «МЕДИКОН»; -01-35; -01-45	195	±10,0	60	±10,0	25+45*	±10,0	1,4	3,5
-02-25; -02-35; -02-45	195	±10,0	90	±10,0	25+45*	±10,0	1,4	3,5
-03-25; -03-35; -03-45	195	±10,0	135	±10,0	25+45*	±10,0	1,5	3,7
-04-25; -04-35; -04-45	195	±10,0	250	±10,0	25+45*	±10,0	1,6	3,7
-05-30; -05-40; -05-50; - 05-60; -05-70; -05-80; -05-90; -05-100	250	±10,0	60	±10,0	30+100*	±10,0	3,8	5,6
-06-30; -06-50; -06-90; - 06-120	320	±10,0	180	±10,0	30+120 *	±10,0	2,0	4,0
-07-30; -07-50; -07-90; - 07-120	445	±10,0	220	±10,0	30+120 *	±10,0	2,6	5,0
-08-30; -08-40; -08-50; - 08-60; -08-70; -08-80; -08-90; -08-100	450	±10,0	70	±10,0	30+100*	±10,0	5,3	7,0
-09-30; -09-40; -09-50;	470	±10,0	135	±10,0	30+50*	±10,0	8,0	9,6
-10-60; -10-75; -10-90	500	±10,0	155	±10,0	60+90*	±10,0	8,5	10,5
-11-40; -11-60; -11-90; - 11-120	525	±10,0	200	±10,0	40+120 *	±10,0	2,8	5,0
-12-80; -12-100;	540	±10,0	160	±10,0	80+100*	±10,0	8,9	10,6

*Для вариантов исполнения, имеющих изменяемую высоту, последняя группа цифр обозначения варианта исполнения соответствуют высоте

Рисунок 4. Контейнер плоский КПл-«МЕДИКОН». Габаритные размеры.

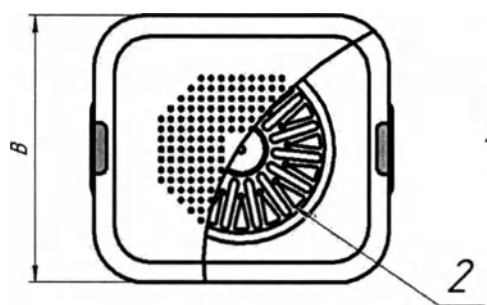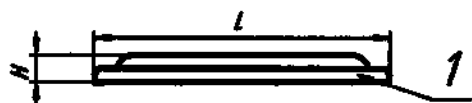


- 1 - Крышка
2 - Держатель фильтра круглый ДФКр-«МЕДИКОН» (см. рис. 10)

Вариант исполнения	L, мм		B, мм		H, мм		Масса кг, не более
КрУ 521-01-«МЕДИКОН»;	240	±30,0	230	±30,0	25	±10, 0	1,3
-02	300	±30,0	280	±30,0	25	±10, 0	1,5
-03	360	±30,0	250	±30,0	25	±10, 0	1,7



-04	465	±30,0	280	±30,0	25	±10, 0	2
-05	590	±30,0	280	±30,0	25	±10, 0	2,5
-06	590	±30,0	400	±30,0	25	±10, 0	3,5
-07	710	±30,0	280	±30,0	25	±10, 0	3,8

Рисунок 5. Крышка контейнера КрУ-«МЕДИКОН». Габаритные размеры.

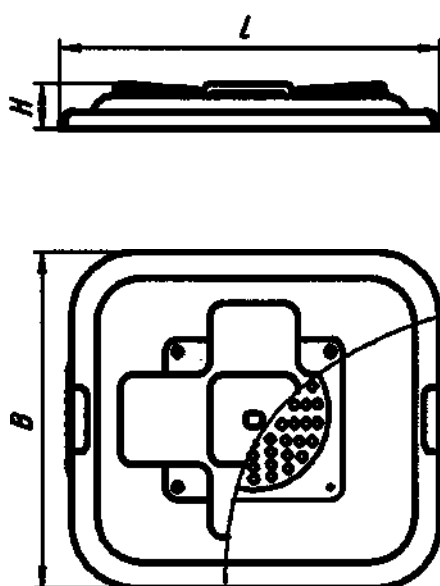

Вариант исполнения	L, мм		B, мм		H, мм		Масса кг, не более
КрК 522-01-«МЕДИКОН»;	300	±30,0	280	±30,0	40	±10, 0	2
-02	360	±30,0	250	±30,0	40	±10, 0	2,7
-03	465	±30,0	280	±30,0	40	±10, 0	3
-04	590	±30,0	280	±30,0	40	±10, 0	3,5
-05	590	±30,0	400	±30,0	40	±10, 0	4,5
-06	710	±30,0	280	±30,0	40	±10, 0	4,8

Рисунок 6. Крышка контейнера с клапаном КрК-«МЕДИКОН». Габаритные размеры.

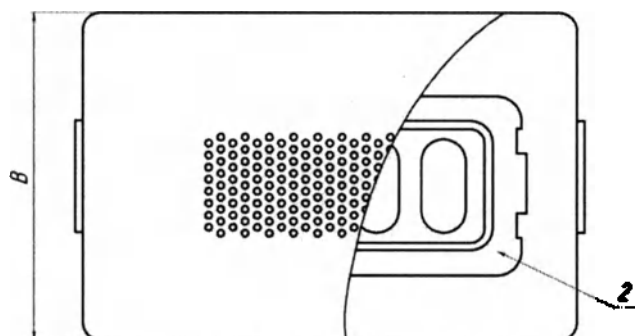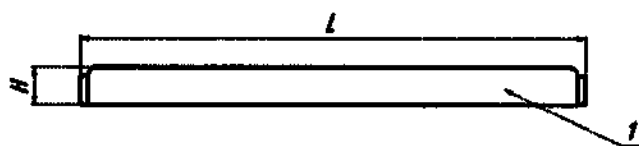


1 – Крышка

2 – Держатель фильтра прямоугольный
ДФГр-«МЕДИКОН» (см. рис. 11)

Вариант исполнения	L, мм		B, мм		H, мм		Масса кг, не более
КрС 523-01-«МЕДИКОН»	220	±30,0	150	±30,0	25	±10,0	1,0
-02	300	±30,0	140	±30,0	25	±10,0	2,0
-03	310	±30,0	190	±30,0	25	±10,0	2,2
-04	530	±30,0	150	±30,0	25	±10,0	2,3


Рисунок 7. Крышка контейнера специального КрС-«МЕДИКОН». Габаритные размеры.

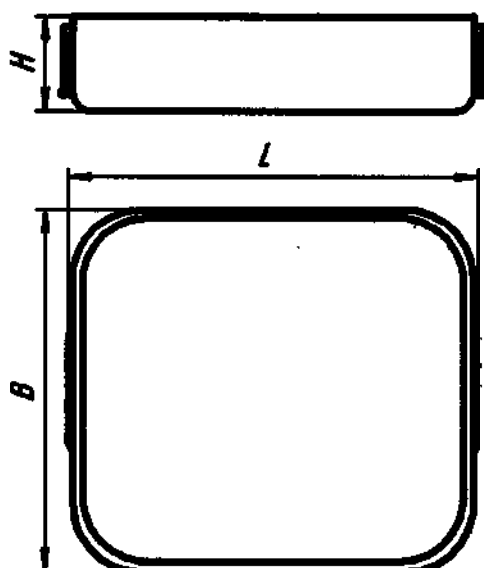

Вариант исполнения	L, мм		B, мм		H, мм		Масса кг, не более	Макс. работ- чая нагруз- ка, кг
ККУ 524-01-65- «МЕДИКОН»; -01- 385	230	±30,0	220	±30,0	65-385*	±10,0	7,8	10,5
-01-40; -02-70; -02-85; -02-120; - 02-135; -02-185; -02-245	310	±30,0	275	±30,0	40+245*	±10,0	4,4	7,0
-03-40; -03-70; -03-85; - 03-120; -03-135; -03-185; -03-245	370	±30,0	250	±30,0	40+245*	±10,0	4,8	8,3
-04-40; -04-70; -04-85; - 04-120; -04-135; -04-185; -04-245	475	±30,0	275	±30,0	40+245*	±10,0	6,3	10,0
-05-40; -05-70; -05-85; - 05-120; -05-135; -05-185; -05-245	600	±30,0	275	±30,0	40+245*	±10,0	7,0	12,0
-06-105; -06-135; -06-165	600	±30,0	395	±30,0	105+165*	±10,0	7,0	13,0
-07-105; -07-135; -07-165	720	±30,0	275	±30,0	105+165*	±10,0	8,2	14,0


*Для вариантов исполнения, имеющих изменяемую высоту, последняя группа цифр обозначения варианта исполнения соответствует высоте

Рисунок 8. Корпус контейнера ККУ-«МЕДИКОН». Габаритные размеры.

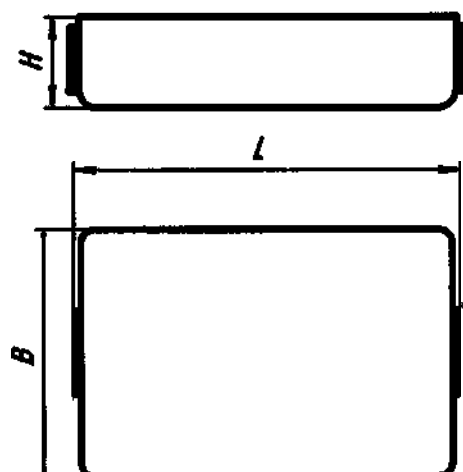


Вариант исполнения	L, мм		B, мм		H, мм		Масса кг, не более	Макс. рабо- чая нагруз- ка, кг
КС 525-01-45- «МЕДИКОН»; -01-70; -01-100	220	±30,0	145	±30,0	45+110*	±10,0	2,0	4,5
-02-40; -02-60; -02-90;	300	±30,0	135	±30,0	40+90*	±10,0	2,2	5,2
-03-30; -03-55; -03-70; - 03-90; -03-120	310	±30,0	185	±30,0	30+120*	±10,0	3,0	5,7
-04-60; -04-80	530	±30,0	145	±30,0	60+80*	±10,0	3,2	5,8

Рисунок 9. Корпус контейнера специального КС-«МЕДИКОН». Габаритные размеры.

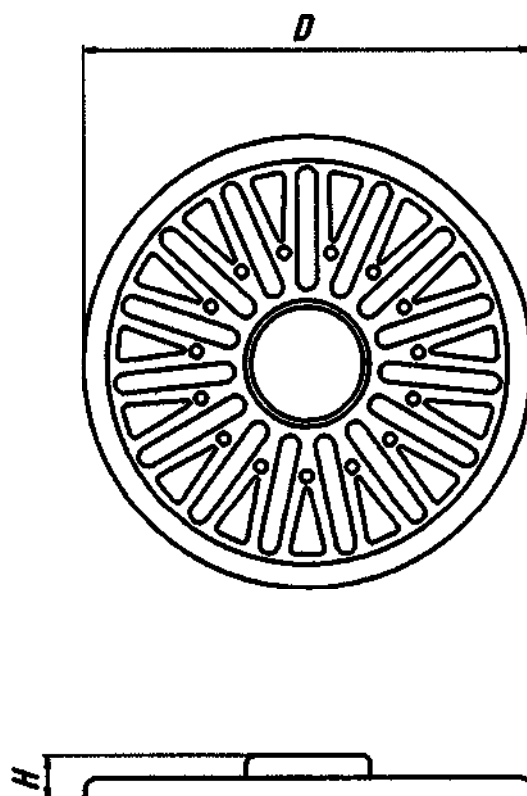


Вариант исполнения	D, мм		H, мм		Масса кг, не более
ДФКр 526-01-«МЕДИКОН»	190	±20,0	20	±15,0	1

Рисунок 10. Держатель фильтра круглый ДФКр-«МЕДИКОН». Габаритные размеры.

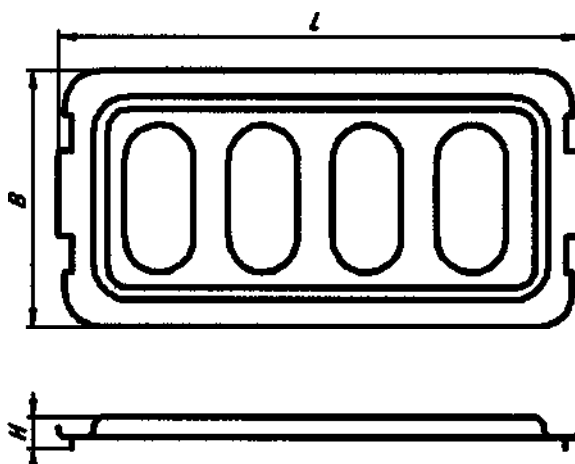

Вариант исполнения	L мм		B, мм		H, мм		Масса кг, не более
ДФПр 527-01-«МЕДИКОН»	150	±20,0	100	±20,0	5	±4,0	1
-02	245	±20,0	100	±20,0	5	±4,0	1

Рисунок 11. Держатель фильтра прямоугольный ДФПр-«МЕДИКОН». Габаритные размеры.

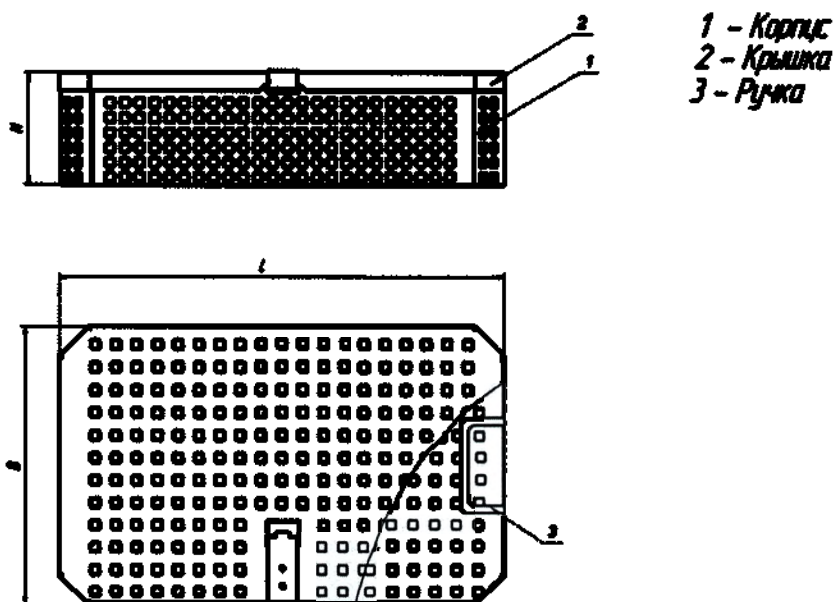


Вариант исполнения	A, мм	B, мм	H*, мм	Масса, кг, не более	Макс. рабочая нагрузка, кг
--------------------	-------	-------	--------	---------------------	----------------------------

ЛИ 528-01-30 «МЕДИКОН»; -01-50; -01-60; -01-70; -01-100	200	±10,0	100	±10,0	30+100	±5,0	0,5	3,8
-02-30; -02-50; -02-60; -02-70; -02-100	220	±10,0	140	±10,0	30+100	±5,0	0,8	4,2
-03-30; -03-50; -03-60; -03-70; -03-100; -03-130; -03-150; -03-170; -03-200	240	±10,0	250	±10,0	30+200	±5,0	1,5	6,2
-04-30; -04-50; -04-60; -04-70; -04-100	250	±10,0	170	±10,0	30+100	±5,0	1,0	4,3
-05-30; -05-50; -05-60; -05-70; -05-100	260	±10,0	115	±10,0	30+100	±5,0	1,0	4,2
-06-30; -06-50; -06-60; -06-70; -06-100	275	±10,0	175	±10,0	30+100	±5,0	1,1	4,6
-07-30; -07-50; -07-60; -07-70; -07-100; -07-130; -07-150; -07-200	290	±10,0	80	±10,0	30+200	±5,0	1,1	4,0
-08-30; -08-50; -08-60; -08-70; -08-100; -08-130; -08-150; -08-200	300	±10,0	200	±10,0	30+200	±5,0	1,5	6,2
-09-30; -09-50; -09-60; -09-70; -09-100; -09-130; -09-150; -09-200	340	±10,0	250	±10,0	30+200	±5,0	1,9	6,5
-10-30; -10-50; -10-60; -10-70; -10-100; -10-130; -10-150; -10-170; -10-200	405	±10,0	250	±10,0	30+200	±5,0	2,2	6,6
-11-30; -11-50; -11-60; -11-70; -11-100; -11-130; -11-150; -11-170; -11-200	425	±10,0	250	±10,0	30+200	±5,0	2,4	6,8
-12-30; -12-50; -12-60; -12-70; -12-100; -12-130; -12-150; -12-170; -12-200	450	±10,0	225	±10,0	30+200	±5,0	2,4	7,0
-13-30; -13-50; -13-60; -13-70; -13-100	450	±10,0	340	±10,0	30+100	±5,0	2,9	7,3
-14-30; -14-50; -14-60; -14-70; -14-100; -14-130; -14-150; -14-170; -14-200	480	±10,0	250	±10,0	30+200	±5,0	2,8	7,8
-15-30; -15-50; -15-60; -15-70; -15-100; -15-130; -15-150; -15-170; -15-200	480	±10,0	300	±10,0	30+200	±5,0	3,0	8,0

-16-30; -16-50; -16-60; -16-70; -16-100; -16-130; -16-150; -16-170; -16-200	510	$\pm 10,0$	250	$\pm 10,0$	30+200	$\pm 5,0$	3,0	8,0
-17-30; -17-50; -17-60; -17-70; -17-100; -17-130; -17-150; -17-170; -17-200	540	$\pm 10,0$	250	$\pm 10,0$	30+200	$\pm 5,0$	3,3	8,2
-18-30; -18-50; -18-60; -18-70; -18-100; -18-130; -18-150; -18-170; -18-200	540	$\pm 10,0$	340	$\pm 10,0$	30+200	$\pm 5,0$	3,6	8,5
-19-30; -19-50; -19-60; -19-70; -19-100; -19-130; -19-150; -19-170; -19-200	600	$\pm 10,0$	250	$\pm 10,0$	30+200	$\pm 5,0$	4,2	9,0

*Для вариантов исполнения, имеющих изменяемую высоту, последняя группа цифр обозначения варианта исполнения соответствуют высоте


Рисунок 12. Лоток инструментальный с крышкой ЛИ – «МЕДИКОН». Габаритные размеры.

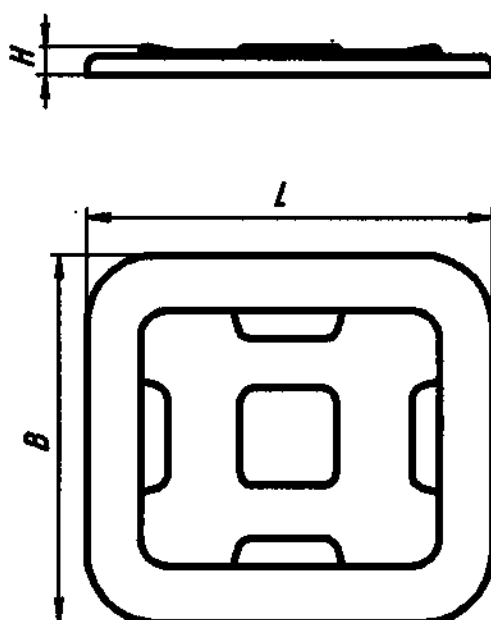

Вариант исполнения	L, мм		B, мм		H, мм		Масса кг, не более
ЗКр 529-01-«МЕДИКОН»;	305	$\pm 30,0$	290	$\pm 30,0$	35	$\pm 10,0$	1,5
-02	365	$\pm 30,0$	260	$\pm 30,0$	35	$\pm 10,0$	1,7
-03	470	$\pm 30,0$	290	$\pm 30,0$	35	$\pm 10,0$	2
-04	595	$\pm 30,0$	290	$\pm 30,0$	35	$\pm 10,0$	2,5
-05	595	$\pm 30,0$	410	$\pm 30,0$	35	$\pm 10,0$	3,5


-06	715	±30,0	290	±30,0	35	$\begin{smallmatrix} \pm 10, \\ 0 \end{smallmatrix}$	3,8
-----	-----	-------	-----	-------	----	--	-----

Рисунок 13. Крышка защитная ЗКр-«МЕДИКОН». Габаритные размеры.

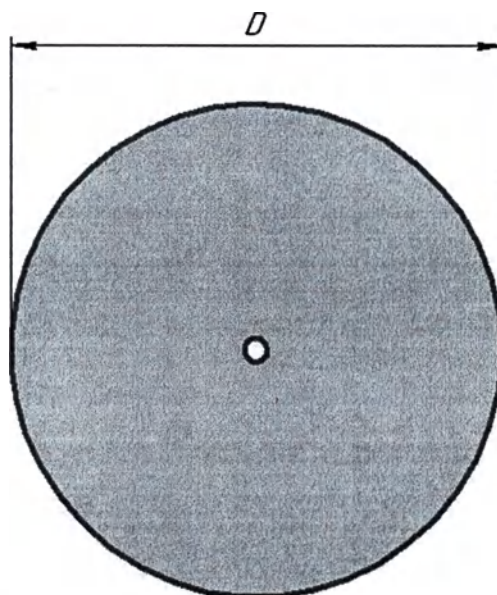

Вариант исполнения	D, мм		Масса кг, не более
ФКр 530-01-«МЕДИКОН»	190	±30,0	0,3

Рисунок 14. Фильтр стерилизационный круглый ФКр-«МЕДИКОН». Габаритные размеры.

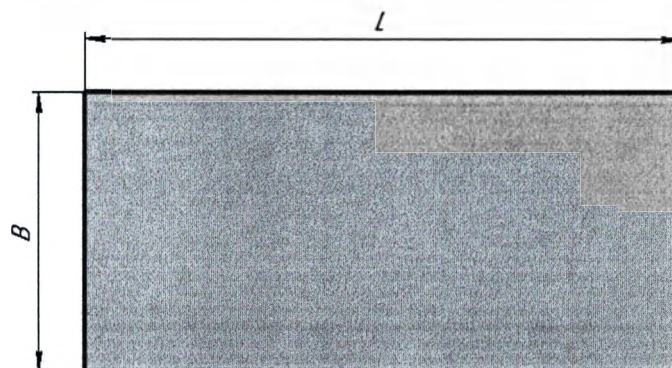

Вариант исполнения	L мм		B, мм		Масса кг, не более
ФПр 531-01-«МЕДИКОН»	125	±30,0	95	±30,0	0,3
-02	210	±30,0	95	±30,0	0,3

Рисунок 15. Фильтр стерилизационный прямоугольный ФПр-«МЕДИКОН». Габаритные размеры

8. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки должен включать:

- Медицинское изделие (из таблицы 2) – 1 шт.
- Принадлежности – по согласованию с Заказчиком

- Эксплуатационная документация – 1 шт.

Примечание:

- по желанию заказчика поставка лотка инструментального с крышкой ЛИ-«МЕДИКОН» возможна без ручек и без крышки.

Таблица 2

Наименование	Обозначение	Обозначение комплекта документации	Рисунок
Контейнер медицинский универсальный	КМУ 501-01-80-«МЕДИКОН» КМУ 501-01-400 КМУ 501-02-55 КМУ 501-02-85 КМУ 501-02-100 КМУ 501-02-135 КМУ 501-02-150 КМУ 501-02-200 КМУ 501-02-260 КМУ 501-03-55 КМУ 501-03-85 КМУ 501-03-100 КМУ 501-03-135 КМУ 501-03-150 КМУ 501-03-200 КМУ 501-03-260 КМУ 501-04-55 КМУ 501-04-85 КМУ 501-04-100 КМУ 501-04-135 КМУ 501-04-150 КМУ 501-04-200 КМУ 501-04-260 КМУ 501-05-55 КМУ 501-05-85 КМУ 501-05-100 КМУ 501-05-135 КМУ 501-05-150 КМУ 501-05-200 КМУ 501-05-260 КМУ 501-06-120 КМУ 501-06-150 КМУ 501-06-180 КМУ 501-07-120 КМУ 501-07-150 КМУ 501-07-180	ИПОС.942319.501	Рис.1
Контейнер медицинский с клапаном	КМК 502-01-115-«МЕДИКОН» КМК 502-01-150 КМК 502-01-165 КМК 502-01-215 КМК 502-01-275 КМК 502-02-115 КМК 502-02-150 КМК 502-02-165 КМК 502-02-215 КМК 502-02-275 КМК 502-03-115	ИПОС.942319.502	Рис.2

	КМК 502-03-150 КМК 502-03-165 КМК 502-03-215 КМК 502-03-275 КМК 502-04-115 КМК 502-04-150 КМК 502-04-165 КМК 502-04-215 КМК 502-04-275 КМК 502-05-135 КМК 502-05-165 КМК 502-05-195 КМК 502-06-135 КМК 502-06-165 КМК 502-06-195		
Контейнер медицинский специальный	КМС 503-01-55-«МЕДИКОН» КМС 503-01-90 КМС 503-01-120 КМС 503-02-50 КМС 503-02-70 КМС 503-02-100 КМС 503-03-40 КМС 503-03-65 КМС 503-03-80 КМС 503-03-100 КМС 503-03-130 КМС 503-04-70 КМС 503-04-90	ИПОС.942319.503	Рис.3
Контейнер плоский	КПл 504-01-25-«МЕДИКОН» КПл 504-01-35 КПл 504-01-45 КПл 504-02-25 КПл 504-02-35 КПл 504-02-45 КПл 504-03-25 КПл 504-03-35 КПл 504-03-45 КПл 504-04-25 КПл 504-04-35 КПл 504-04-45 КПл 504-05-30 КПл 504-05-40 КПл 504-05-50 КПл 504-05-60 КПл 504-05-70 КПл 504-05-80 КПл 504-05-90 КПл 504-05-100 КПл 504-06-30 КПл 504-06-50 КПл 504-06-90 КПл 504-06-120 КПл 504-07-30 КПл 504-07-50 КПл 504-07-90 КПл 504-07-120	ИПОС.942319.504	Рис.4

	КПл 504-08-30 КПл 504-08-40 КПл 504-08-50 КПл 504-08-60 КПл 504-08-70 КПл 504-08-80 КПл 504-08-90 КПл 504-08-100 КПл 504-09-30 КПл 504-09-40 КПл 504-09-50 КПл 504-10-60 КПл 504-10-75 КПл 504-10-90 КПл 504-11-40 КПл 504-11-60 КПл 504-11-90 КПл 504-11-120 КПл 504-12-80 КПл 504-12-100		
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ			
Крышка контейнера	КрУ 521-01-«МЕДИКОН» КрУ 521-02 КрУ 521-03 КрУ 521-04 КрУ 521-05 КрУ 521-06 КрУ 521-07	ИПОС.942319.521	Рис.5
Крышка контейнера с клапаном	КрК 522-01-«МЕДИКОН» КрК 522-02 КрК 522-03 КрК 522-04 КрК 522-05 КрК 522-06	ИПОС.942319.522	Рис.6
Крышка контейнера специального	КрС 523-01-«МЕДИКОН» КрС 523-02 КрС 523-03 КрС 523-04	ИПОС.942319.523	Рис.7
Корпус контейнера	ККУ 524-01-65-«МЕДИКОН» ККУ 524-01-385 ККУ 524-02-40 ККУ 524-02-70 ККУ 524-02-85 ККУ 524-02-120 ККУ 524-02-135 ККУ 524-02-185 ККУ 524-02-245 ККУ 524-03-40 ККУ 524-03-70 ККУ 524-03-85 ККУ 524-03-120 ККУ 524-03-135 ККУ 524-03-185 ККУ 524-03-245 ККУ 524-04-40 ККУ 524-04-70	ИПОС.942319.524	Рис.8

	ККУ 524-04-85 ККУ 524-04-120 ККУ 524-04-135 ККУ 524-04-185 ККУ 524-04-245 ККУ 524-05-40 ККУ 524-05-70 ККУ 524-05-85 ККУ 524-05-120 ККУ 524-05-135 ККУ 524-05-185 ККУ 524-05-245 ККУ 524-06-105 ККУ 524-06-135 ККУ 524-06-165 ККУ 524-07-105 ККУ 524-07-135 ККУ 524-07-165		
Корпус контейнера специального	КС 525-01-45-«МЕДИКОН» КС 525-01-70 КС 525-01-100 КС 525-02-40 КС 525-02-60 КС 525-02-90 КС 525-03-30 КС 525-03-55 КС 525-03-70 КС 525-03-90 КС 525-03-120 КС 525-04-60 КС 525-04-80	ИПОС.942319.525	Рис.9
Держатель фильтра круглый	ДФКр 526-01-«МЕДИКОН»	ИПОС.942319.526	Рис.10
Держатель фильтра прямоугольный	ДФПр 527-01-«МЕДИКОН» ДФПр 527-02-«МЕДИКОН»	ИПОС.942319.527	Рис.11
Лоток инструментальный с крышкой	ЛИ 528-01-30-«МЕДИКОН» ЛИ 528-01-50 ЛИ 528-01-60 ЛИ 528-01-70 ЛИ 528-01-100 ЛИ 528-02-30 ЛИ 528-02-50 ЛИ 528-02-60 ЛИ 528-02-70 ЛИ 528-02-100 ЛИ 528-03-30 ЛИ 528-03-50 ЛИ 528-03-60 ЛИ 528-03-70 ЛИ 528-03-100 ЛИ 528-03-130 ЛИ 528-03-150 ЛИ 528-03-170 ЛИ 528-03-200 ЛИ 528-04-30 ЛИ 528-04-50	ИПОС.942319.528	Рис.12

	ЛИ 528-04-60		
	ЛИ 528-04-70		
	ЛИ 528-04-100		
	ЛИ 528-05-30		
	ЛИ 528-05-50		
	ЛИ 528-05-60		
	ЛИ 528-05-70		
	ЛИ 528-05-100		
	ЛИ 528-06-30		
	ЛИ 528-06-50		
	ЛИ 528-06-60		
	ЛИ 528-06-70		
	ЛИ 528-06-100		
	ЛИ 528-07-30		
	ЛИ 528-07-50		
	ЛИ 528-07-60		
	ЛИ 528-07-70		
	ЛИ 528-07-100		
	ЛИ 528-07-130		
	ЛИ 528-07-150		
	ЛИ 528-07-200		
	ЛИ 528-08-30		
	ЛИ 528-08-50		
	ЛИ 528-08-60		
	ЛИ 528-08-70		
	ЛИ 528-08-100		
	ЛИ 528-08-130		
	ЛИ 528-08-150		
	ЛИ 528-08-200		
	ЛИ 528-09-30		
	ЛИ 528-09-50		
	ЛИ 528-09-60		
	ЛИ 528-09-70		
	ЛИ 528-09-100		
	ЛИ 528-09-130		
	ЛИ 528-09-150		
	ЛИ 528-09-200		
	ЛИ 528-10-30		
	ЛИ 528-10-50		
	ЛИ 528-10-60		
	ЛИ 528-10-70		
	ЛИ 528-10-100		
	ЛИ 528-10-130		
	ЛИ 528-10-150		
	ЛИ 528-10-170		
	ЛИ 528-10-200		
	ЛИ 528-11-30		
	ЛИ 528-11-50		
	ЛИ 528-11-60		
	ЛИ 528-11-70		
	ЛИ 528-11-100		
	ЛИ 528-11-130		
	ЛИ 528-11-150		
	ЛИ 528-11-170		
	ЛИ 528-11-200		
	ЛИ 528-12-30		
	ЛИ 528-12-50		

	ЛИ 528-12-60		
	ЛИ 528-12-70		
	ЛИ 528-12-100		
	ЛИ 528-12-130		
	ЛИ 528-12-150		
	ЛИ 528-12-170		
	ЛИ 528-12-200		
	ЛИ 528-13-30		
	ЛИ 528-13-50		
	ЛИ 528-13-60		
	ЛИ 528-13-70		
	ЛИ 528-13-100		
	ЛИ 528-14-30		
	ЛИ 528-14-50		
	ЛИ 528-14-60		
	ЛИ 528-14-70		
	ЛИ 528-14-100		
	ЛИ 528-14-130		
	ЛИ 528-14-150		
	ЛИ 528-14-170		
	ЛИ 528-14-200		
	ЛИ 528-15-30		
	ЛИ 528-15-50		
	ЛИ 528-15-60		
	ЛИ 528-15-70		
	ЛИ 528-15-100		
	ЛИ 528-15-130		
	ЛИ 528-15-150		
	ЛИ 528-15-170		
	ЛИ 528-15-200		
	ЛИ 528-16-30		
	ЛИ 528-16-50		
	ЛИ 528-16-60		
	ЛИ 528-16-70		
	ЛИ 528-16-100		
	ЛИ 528-16-130		
	ЛИ 528-16-150		
	ЛИ 528-16-170		
	ЛИ 528-16-200		
	ЛИ 528-17-30		
	ЛИ 528-17-50		
	ЛИ 528-17-60		
	ЛИ 528-17-70		
	ЛИ 528-17-100		
	ЛИ 528-17-130		
	ЛИ 528-17-150		
	ЛИ 528-17-170		
	ЛИ 528-17-200		
	ЛИ 528-18-30		
	ЛИ 528-18-50		
	ЛИ 528-18-60		
	ЛИ 528-18-70		
	ЛИ 528-18-100		
	ЛИ 528-18-130		
	ЛИ 528-18-150		
	ЛИ 528-18-170		
	ЛИ 528-18-200		

	ЛИ 528-19-30 ЛИ 528-19-50 ЛИ 528-19-60 ЛИ 528-19-70 ЛИ 528-19-100 ЛИ 528-19-130 ЛИ 528-19-150 ЛИ 528-19-170 ЛИ 528-19-200		
Крышка защитная	ЗКр 529-01-«МЕДИКОН» ЗКр 529-02 ЗКр 529-03 ЗКр 529-04 ЗКр 529-05 ЗКр 529-06	ИПОС.942319.529	Рис.13
Фильтр стерилизационный круглый	ФКр 530-01-«МЕДИКОН»	ИПОС.942319.530	Рис.14
Фильтр стерилизационный прямоугольный	ФПр 531-01-«МЕДИКОН» ФПр 531-02-«МЕДИКОН»	ИПОС.942319.531	Рис.15

9. МАТЕРИАЛЫ

Контейнеры и принадлежности изготовлены из нержавеющей стали марки 12Х18Н9 по ГОСТ 5632-2014, алюминиевого сплава марок АМц, АМг по ГОСТ 4784-2019.

10. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлечь контейнеры и принадлежности из транспортной тары и освободить от полиэтилена.
2. Осмотреть на предмет целостности, отсутствия коррозии и/или механических повреждений.
3. Провести проверку комплектности согласно разделу 8.
4. Контейнеры необходимо установить на ровное место и проверить на устойчивость.
5. Перед началом эксплуатации контейнеры и принадлежности должны быть подвержены дезинфекции, согласно МУ 287-113-98 3 %-ым раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 %-го раствора моющего средства типа "Лотос" по ГОСТ 25644-96 и стерилизации методом автоклавирования при температуре пара $(132 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение 20 мин., либо при $(134 \pm 1)^\circ\text{C}$ в течение 5 мин.

11. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

11.1 Проведение дезинфекции и предстерилизационной очистки механизированным способом в автоматических моечно-дезинфекционных машинах, водоструйных и ультразвуковых, в стерилизаторах:

11.1.1 Контейнеры необходимо установить на ровное место, расположить в них принадлежности (при необходимости), уложить медицинские инструменты и материалы и закрыть крышкой (при наличии).

11.1.2 Установить контейнер в моечно-дезинфекционную машину или в стерилизатор и выбрать режим дезинфекции в соответствии с МУ 287-113-98 и эксплуатационной документацией дезинфицируемых изделий и моечно-дезинфекционной машины или стерилизатора.

Для алюминиевых контейнеров применять только чистящее средство с нейтральным уровнем pH (водородный показатель pH = 6-8), которые допущены производителями для чистки алюминиевых контейнеров.

Для заключительного промывания нужно использовать полностью деминерализованную воду.

Для очистки контейнеров не использовать металлические щетки или иные абразивные средства, повреждающие поверхность, так как в этом случае возникает опасность коррозии.

11.1.3 После окончания цикла дезинфекции извлечь контейнеры и установить их на ровное место (для извлечения продезинфицированных изделий).

Примечание!

Разъемные изделия дезинфицируют в разобранном виде.

11.2 Проведение стерилизации медицинских инструментов:

11.2.1 Контейнеры необходимо установить на ровное место, расположить в них принадлежности (при необходимости), уложить медицинские инструменты и закрыть крышкой (при наличии).

11.2.2 Установить контейнер в стерилизатор и выбрать режим стерилизации в соответствии с МУ 287-113-98 и эксплуатационной документацией стерилизуемых изделий и стерилизатора.

11.2.3 После окончания цикла стерилизации извлечь контейнеры и установить их на ровное место (для извлечения простерилизованных материалов). Либо транспортировать контейнеры с медицинскими изделиями (в случае, если изделия стерилизовались в упакованном виде) к месту их дальнейшей эксплуатации или хранения.

Примечание!

Разъемные изделия стерилизуют в разобранном виде.

Медицинские изделия размещаются, стерилизуются и хранятся* в контейнерах как в неупакованном виде, так и в специальной упаковке, предназначенной для паровой стерилизации.

Сроки сохранения стерильности изделий, простерилизованных в специальной упаковке, указаны в документации на конкретный вид упаковочных материалов.

** - Не все контейнеры являются упаковкой для длительного хранения простерилизованных неупакованных изделий, но, если эти изделия хранятся в течение времени, заявляемого производителем, допускается использовать такие изделия по назначению.*

Срок сохраняемости стерильности инструментов в контейнерах КМУ, КМК и КМС после стерилизации – 90 суток.

После стерилизации условия хранения медицинского изделия определяются внутрибольничными протоколами и/или методическими рекомендациями лечебного учреждения. Ответственность за условия и продолжительность хранения, а также за их соблюдение несёт эксплуатирующая организация.

11.3 Комплектование наборов медицинских инструментов и материалов на операции или медицинские манипуляции.

11.3.1 При комплектовании наборов медицинских инструментов и материалов на операции или медицинские манипуляции контейнеры с принадлежностями используются в качестве стерильной рабочей поверхности. В данном случае перед применением контейнеры и принадлежности должны пройти цикл дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации в соответствии с МУ 287-113-98. Рекомендованный производителем метод стерилизации контейнеров с принадлежностями: автоклавирование при температуре пара $(132 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение 20 мин. или $(134 \pm 1)^\circ\text{C}$ в течение 5 мин.

Примечание!

Дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию контейнеров и принадлежностей, состоящих из нескольких частей, проводить в разобранном виде.

При стерилизации контейнеров и принадлежностей их укладывают в упакованном виде на ребро, или дном вверх во избежание конденсатообразования.

Стерильные изделия, переложённые в контейнеры, хранению не подлежат и используются немедленно.

11.4 Хранение и транспортировка медицинских инструментов после операций

11.4.1 Во время проведения операций или медицинских манипуляций контейнеры, применяемые ранее для комплектования наборов медицинских инструментов и материалов, могут повторно применяться для сбора использованных медицинских инструментов и материалов в целях дальнейшей транспортировки использованных медицинских инструментов и материалов для проведения дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации или утилизации.

12. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

Эффективность и надежность стерилизации зависит от многих факторов. Далее приведены ключевые моменты, на которые необходимо обратить внимание персоналу:

- Паровой стерилизацией допускается стерилизовать только те медицинские изделия, которые выдерживают воздействие влажного тепла (пара), высокой температуры и давления, и при этом не теряют своих физических свойств. Надо иметь в виду, что некоторые материалы могут выдерживать только определенное количество раз стерилизацию паром.

- На стерилизацию должны поступать медицинские изделия и материалы, прошедшие дезинфекцию, предстерилизационную очистку и соответствующим образом проверенные.

- Качество предстерилизационной очистки должно быть проверено разрешенными методами.

- Инструмент, состоящий из нескольких деталей, должен укладываться в контейнер и стерилизоваться в разобранном виде.

- При стерилизации, изделия в контейнере не должны оказывать давление друг на друга. Клапаны и запорные устройства на этих изделиях должны быть открыты, чтобы пар мог свободно проходить внутрь и выходить обратно.

- Одноразовые бумажные фильтры должны быть заменены перед каждым циклом стерилизации. Бумажные фильтры должны быть чистыми, сухими, не могут быть использованными, просроченными или поврежденными.

- Для поддержания контейнеров и принадлежностей в исправном состоянии необходимо следить за своевременной обработкой в соответствии с настоящей инструкцией и содержанием в чистом состоянии.

- Не использовать поврежденные или неисправные контейнеры для стерилизации.

- В целях обеспечения заявленного срока службы контейнеров и принадлежностей запрещается хранить контейнеры и принадлежности, предварительно не просушив.

- Больничное учреждение остается ответственным за эффективность проведенного им процесса очистки, упаковки и стерилизации в соответствии с имеющимся оборудованием, материалов и должным образом обученного персонала.

13. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

К эксплуатации контейнеров с принадлежностями допускаются лица медицинского персонала, внимательно изучившие настоящую инструкцию по применению, освоившие правила эксплуатации контейнеров и используемых моечно-дезинфекционных машин и стерилизаторов.

Персонал должен пройти соответствующую подготовку по применению средств предстерилизационной очистки и дезинфицирующих средств, а также действиям по оказанию первой помощи в случаях отравления, согласно действующим нормативным и методическим документам.

Не следует допускать к работе с дезинфекционными средствами лиц с повышенной чувствительностью к данным препаратам.

При использовании для комплектования наборов медицинских инструментов и материалов на операции или медицинские манипуляции следует убедиться в стерильности контейнера и/или принадлежности.

При изготовлении и применении растворов необходимо строго соблюдать концентрацию смеси и продолжительность погружения в раствор.

Запрещается применение хлорсодержащих дезинфицирующих средств.

Запрещается применение металлических щеток и абразивных материалов при очистке изделий из нержавеющей стали.

Запрещается применение агрессивных жидкостей (растворителей, ацетона и т.п.).

Изделия извлекать сразу после окончания программ аппарата для чистки и дезинфекции.

Запрещается эксплуатировать контейнеры и принадлежности при наличии механических повреждений, а также при наличии следов коррозии у контейнеров и принадлежностей, изготовленных из металлов.

Работа с контейнерами и принадлежностями должна осуществляться в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках, халатах, защитных очках и бахилах).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ С КОНТЕЙНЕРАМИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ БЕЗ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

14. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Контейнеры с принадлежностями транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования контейнеров с принадлежностями – для условий хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69:

- температура от -50°C до +50°C
- относительная влажность воздуха от 75% при температуре +15°C до 100% при температуре +25°C.

Контейнеры и принадлежности должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских вентилируемых помещениях с исключением воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков и агрессивных сред в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69:

- температура от +5°C до +40°C
- относительная влажность воздуха не более 60% при температуре +20°C

15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

Утилизация контейнеров должна производиться в соответствии с установленными нормами и правилами РФ, действующими на момент утилизации.

Контейнеры и принадлежности утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А.

16. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В процессе производства контейнеров с принадлежностями для предотвращения загрязнения атмосферы и охраны окружающей среды должны выполняться требования ГОСТ Р 58577-2019 и ГОСТ 17.2.3.01-86.

Контейнеры с принадлежностями не являются источником загрязнения окружающей среды и соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21

В процессе производства контейнеров с принадлежностями должны выполняться требования СП 2.2.3670-20.

Накопление и утилизация производственных отходов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21.

Материалы, из которых изготовлены контейнеры с принадлежностями, не обладают способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ при температуре окружающей среды.

17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Критерии, условия эксплуатации, транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
- Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»;
- ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»;
- ГОСТ 5632-2014 «Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки»;
- ГОСТ 4784-2019 «Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки»;
- ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики»;
- МУ 287-113-98 «Методические указания по дезинфекции, предварительной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения»;
- ГОСТ 177-88 «Водорода перекись. Технические условия»;
- ГОСТ 25644-96 «Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования»;
- ГОСТ 2930-62 «Приборы измерительные. Шрифты и знаки»;
- ГОСТ 10354-82 «Пленка полиэтиленовая. Технические условия»;
- ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»;
- ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования»;
- ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия»;
- ГОСТ 7933-89 «Картон для потребительской тары. Общие технические условия»;
- ГОСТ 20477-86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия»;
- ГОСТ 9142-2014 «Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 52901 «Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия»

- ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
- ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
- ГОСТ 12.4.021-75 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования»;
- ГОСТ 12.4.121-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия»;
- ГОСТ 12.4.296-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов»;
- ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов»;
- ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- ГОСТ 8.051-81 «Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм»;
- ГОСТ 166-89 «Штангенциркули. Технические условия»;
- ГОСТ 427-75 «Линейки измерительные металлические. Технические условия»;
- ГОСТ Р 53228-2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»;

– ГОСТ 9378-93 «Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия»;

– ГОСТ 19300-86 «Средства измерений шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры»;

– ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические условия»;

- ГОСТ 9378-93 «Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия»;

- ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 58611-2019 «Бумага писчая. Общие технические условия».

- ТУ 2245-001-93730642-2007 «Лента липкая с изм № 1-5. Технические условия»

- ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 «Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования.

- ТУ 22.21.30-001-93711900-2020 «Пленка полимерная многослойная растягивающаяся торговой марки «NOVAROLL»

18. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие контейнеров с принадлежностями требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и правил эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями и эксплуатационной документацией.

Гарантированный срок эксплуатации контейнеров и принадлежностей - не менее 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты продажи.

Гарантийный срок хранения контейнеров и принадлежностей - 12 месяцев со дня изготовления.

19. РЕКЛАМАЦИЯ

В случае претензий по качеству изделий, а также другим вопросам, связанным с использованием изделия, направлять информацию производителю по адресу:

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «МЕДИКОН» (ООО «НПФ «МЕДИКОН»), Россия, 420037, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Симонова, д. 14/41, помещение 3Н, тел.: +7 (843) 528-28-09, e-mail: medicon@bk.ru;

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 38 (тридцать восемь) листов

Должность директор

ООО НПФ «МЕДИКОН»

Подпись [подпись] / Захаров С.А.

