



Рисунок 1 – Изделие в сборе

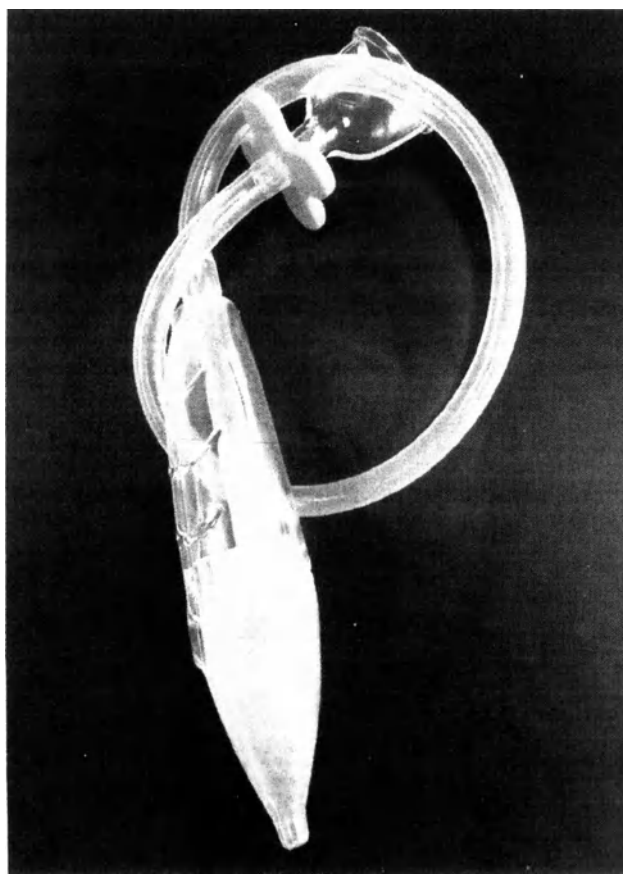


Рисунок 2 – Изделие в сборе

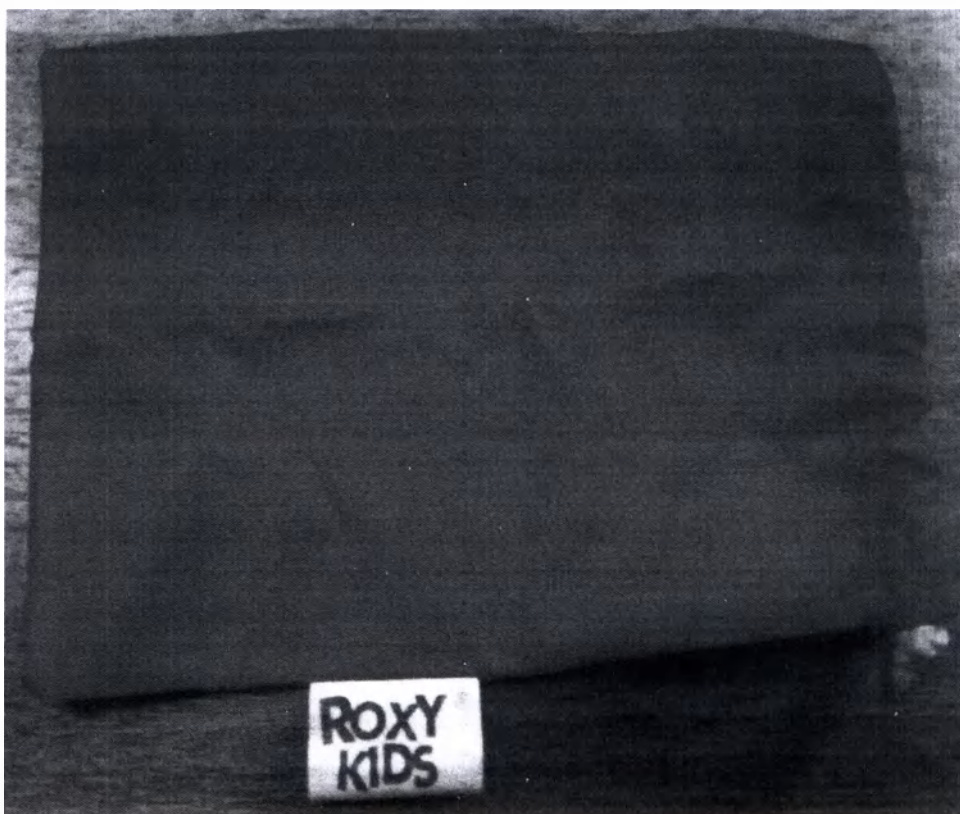


Рисунок 3 – Мешочек для хранения aspirатора

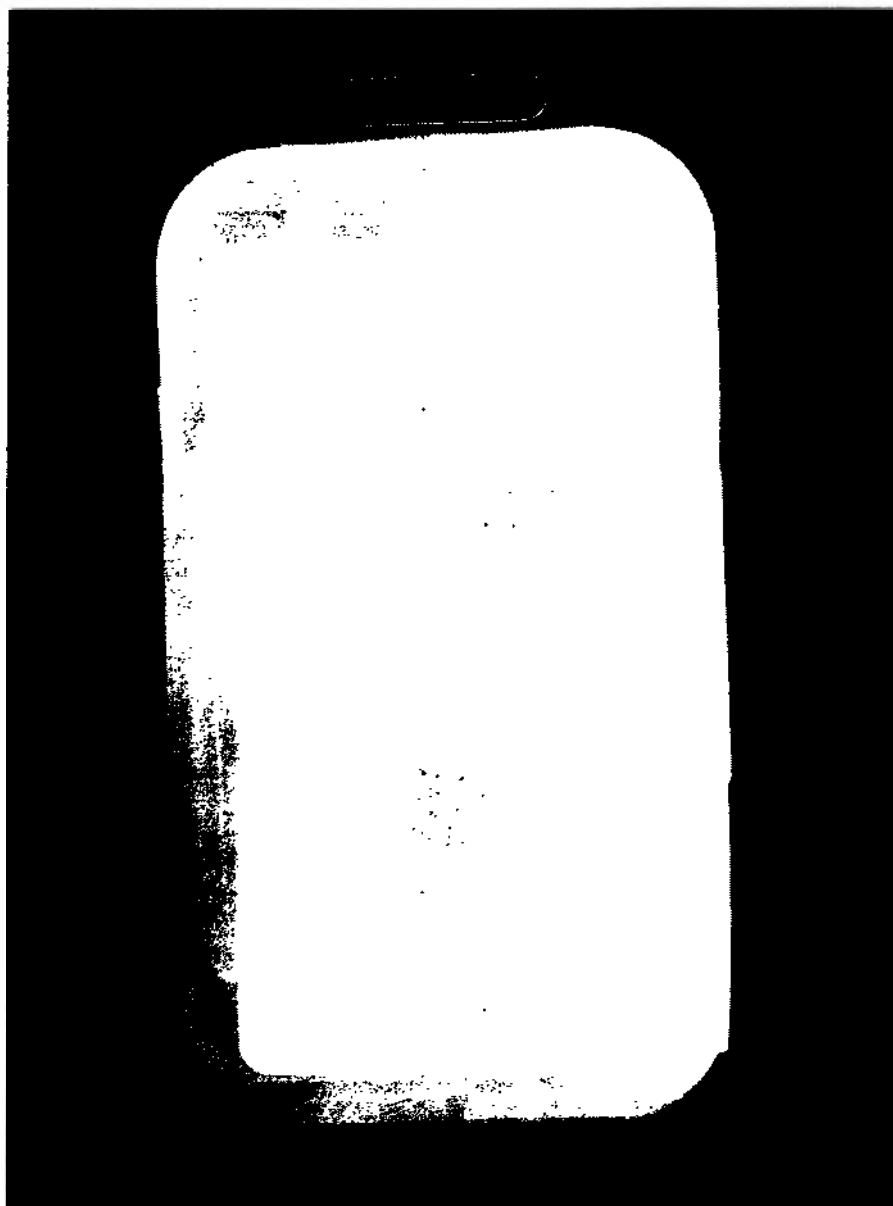


Рисунок 4 – Аспиратор в футляре

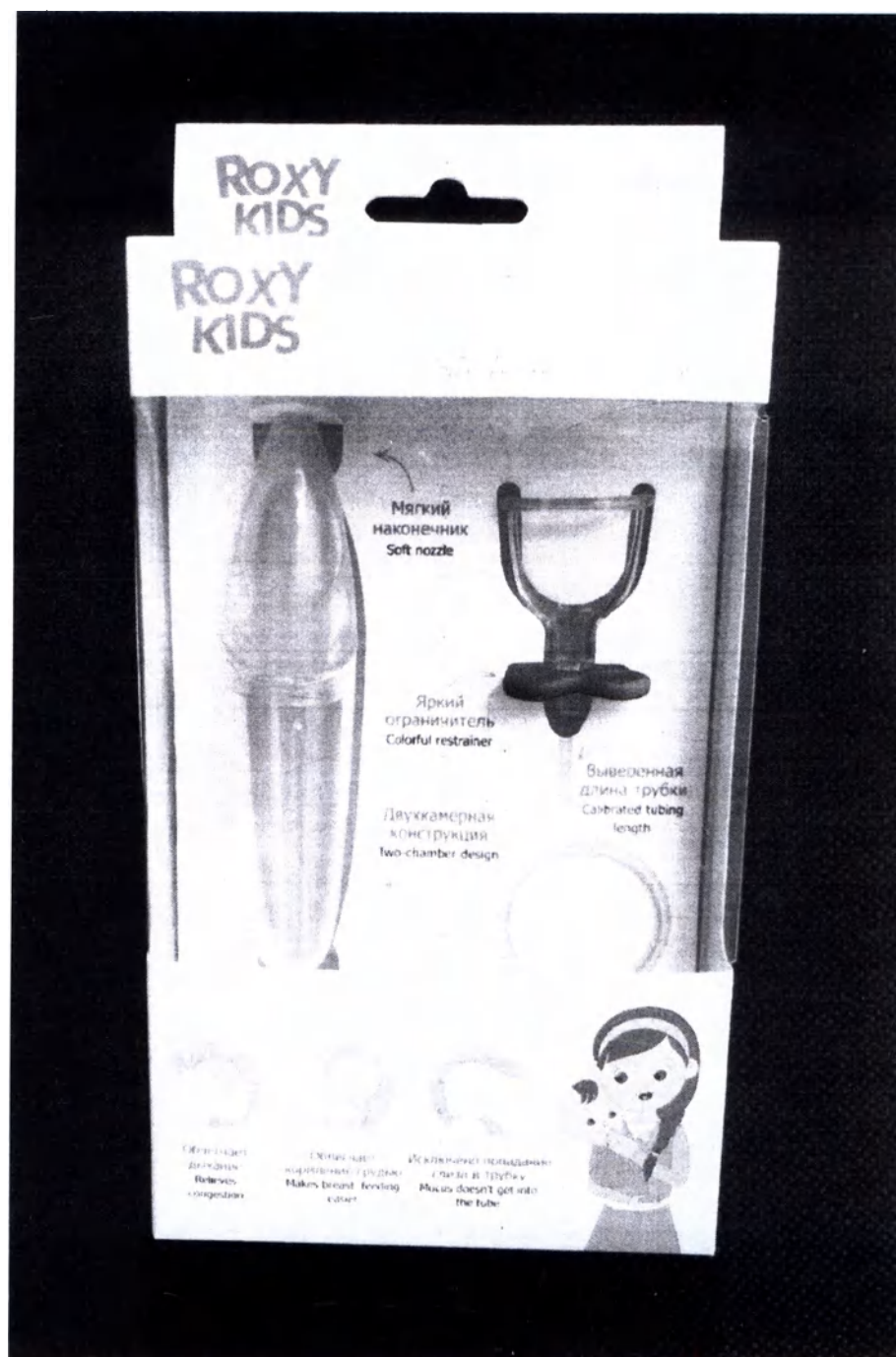


Рисунок 6 – Картонная упаковка, вид спереди

ROXY KIDS

0+

АСПИРАТОР НАЗАЛЬНЫЙ NASAL ASPIRATOR KIT



Безопасный наконечник из мягкого материала не травмирует малыша



Увеличенный диаметр отводящей трубочки обеспечивает легкость процедуры

Защитная конструкция раздельной камеры предотвращает попадание слизистых выделений в трубочку

RUS: Аспиратор назальный по ТУ 32.50.50-001-64276811-2017 с принадлежностями. Предназначен для очищения дыхательных путей, удаления слизистых выделений у новорожденных, грудных детей и детей младшего дошкольного возраста (до 3 лет). Материалы: PS (корпус, мундштук), TPE (наконечник), PP (ограничитель), медицинский силикон (трубка), полиэфир (мешочек). Срок службы – 3 года с даты продажи. Дата изготовления указана на упаковке. Хранить в упаковке при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Изделие не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и растворителей. Не подлежит обязательной сертификации и декларированию. Сделано в России. Производитель и уполномоченная организация по принятию претензий от потребителей: ООО «РОКХИ», 196233, Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 11, корп. 2, silicone@roxykids.ru. Сохраняйте упаковку с данными производителя.

Соответствует ТУ 32.50.50-001-64276811-2017

Пер. уд. РЭН № _____ от _____

Назальный аспиратор предназначен для очищения дыхательных путей, удаления слизистых выделений у новорожденных, грудных детей и детей младшего дошкольного возраста (до 3 лет). Анатомический наконечник и прозрачный материал изделия позволяют эффективно и легко производить данную гигиеническую процедуру. Благодаря разборной конструкции, изделие легко мыть. В аспираторе не используются фильтры, что удобно и экономично. Откачиваемая слизь скапливается в отдельной камере корпуса, попадание в трубку исключено.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать по назначению. Не всасывать воздух из трубочки резко. Не использовать при наличии ран на слизистой носа и при носовом кровотечении. Не эксплуатировать аспиратор по истечении срока годности, при наличии механических повреждений на элементах аспиратора, а также в случае аллергии на материалы компонентов изделия. Не переворачивайте аспиратор во время использования. Храните в местах, недоступных детям, вдали от нагревательных приборов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Для облегчения проведения процедуры рекомендуется увлажнить полость носика ребенка специальным солевым раствором. Далее возьмите мундштук в рот и вставьте наконечник аспиратора в один из носовых ходов ребенка. Осторожно втягивайте воздух ртом при помощи равномерных вдохов через мундштук. Контролируйте заполняемость контейнера аспиратора. При необходимости отделите наконечник от корпуса и промойте изделие от слизистого секрета. Далее можно продолжить процедуру для другого носового хода. Перед применением следует тщательно вымыть изделие с помощью мыльного раствора, окатить крутым кипятком и просушить. В лечебных учреждениях аспиратор дезинфицируют погружением в 3%-ный раствор перекиси водорода или в 3%-ный раствор хлорина по согласию МУ 287-113. По окончании дезинфекционной выдержки аспиратор промывают проточной питьевой водой.

Аспиратор, не загрязненный биологическими жидкостями, утилизировать как отходы класса А. Аспиратор, загрязненный биологическими жидкостями, утилизировать как отходы класса Б. Изделие соответствует: ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2015.


KAZ: Мундштук армизлам аспиратор. Құраны: PS (корпус, санылау), TPE (шұтық), PP (шектеу), силикон (түтік), полиэфир (сәм). Жарамалық мерзімі: 3 жыл. Өңірленген күні қаптамда көрсетілген. Өңірлері: ЖШҚ «РОКХИ», 196233, Санкт-Петербург қ., Звездная к-сі 11, корп. 2. Міндетті сертификаттауға жатпайды. Ресейде жасалған.

ENG: Nasal aspirator. Material: PS (body and mouthpiece), TPE (nozzle), PP (restrainer), medical silicone (tube), polyester (bag). Shelf life: 3 years. Date of manufacture is indicated on the package. Producer: ROXY LLC, 196233, Saint Petersburg, Zvezdnaya str., 11, bld. 2. Not subject to mandatory certification. Made in Russia.

© ROXY LLC, 2019. ROXY-KIDS is registered trademark. All rights for design and trademark are reserved and belong to ROXY LLC.

Рисунок 7 – Картонная упаковка, вид сзади

Рисунок 8 – Картонная упаковка, вид снизу

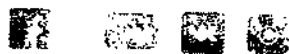

#roxykids #roxynasasaspirator
#аспиратор роокси

www.roxy-kids.ru



Дата изготовления:

Date of manufacture: **03/2019**

Арт. RND-27-116



ROXY
KIDS

NON
TOXIC

SAFETY

Рисунок 9 – Картонная упаковка, вид слева

ROXY
KIDS



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аспиратор состоит из корпуса,
наконечника, катетера,
мундштука, ограничителя.
Длина аспиратора в сборе ≈ 45 см.
Длина трубки – 30 см. Диаметр
наконечника – 5 мм.

Мешочек для хранения
аспиратора

Отсутствуют
расходники
No extra
supplies

Рисунок 10 – Картонная упаковка, вид справа