

КОПИЯ

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会
中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

02271172

中国国际贸易促进委员会 中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书 CERTIFICATE



号码 No. 255101A0/000196

兹证明：在所附文件上的成都市萨尼医疗器械有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of CHENGDU SANI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD on the annexed DOCUMENT is genuine.



授权签字:

Authorized
Signature:

Ge Ye

日期: 2025年02月13日
(Date: Feb. 13, 2025)

查询网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

CHENGDU SANI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD

SANI

УТВЕРЖДАЮ» / "APPROVE"

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd /

"Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд", Китай

Генеральный директор / CEO

(должность / position)

Чунься Хэ / Chunxia He

(имя/name)

12.02.2025

Дата /Date

(подпись/signature)

М.П. Stamp



**Инструкция по эксплуатации
медицинского изделия**

**Instructions for the use
of a medical device**

**«Инструменты эндодонтические SANI для корневых каналов
многоразового использования в наборах для машинного применения,
варианты исполнения»**

«SANI endodontic instruments for root canals reusable in sets for machine use»

Содержание

1. Наименование медицинского изделия.
2. Сведения о производителе.
3. Сведения об уполномоченном представителе.
4. Назначение медицинского изделия, целевые потребители.
5. Область применения.
6. Показания к применению.
7. Противопоказания.
8. Возможные побочные действия.
9. Описание изделия.
10. Сведения о типе хвостовика.
11. Окружающая среда, условия применения изделия.
12. Ограничения применения, совместимость с другими изделиями.
13. Описание принципов работы изделия.
14. Материалы изготовления изделия.
15. Требования безопасности и меры предосторожности при эксплуатации.
16. Требования к охране окружающей среды.
17. Очистка, дезинфекция.
18. Стерильность, стерилизация.
19. Упаковка медицинского изделия.
20. Маркировка медицинского изделия.
- 20.1. Комплектация.
21. Транспортировка медицинского изделия.
22. Хранение, срок годности медицинского изделия.
23. Техническое обслуживание и ремонт медицинского изделия.
24. Гарантийные обязательства производителя.
25. Подача рекламаций.
26. Утилизация и уничтожение медицинского изделия.

1. Наименование медицинского изделия.

Инструменты эндодонтические SANI для корневых каналов многоразового использования в наборах для машинного применения, варианты исполнения:

1. TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан, варианты исполнения:

1. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе:

- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер D1, длина 16 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер D2, длина 19 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер D3, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

2. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе:

- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер SX, длина 19 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер S1, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер S2, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F1, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F2, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F3, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

3. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе:

- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер SX, длина 19 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер S1, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер S2, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F1, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F2, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F3, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

4. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе:

- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер SX, длина 19 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер S1, длина 28 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер S2, длина 28 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F1, длина 28 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F2, длина 28 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F3, длина 28 мм, никель-титан, 1 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

5. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе:

- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер SX, длина 19 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер S1, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер S2, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F1, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F2, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F3, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

6. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе: TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер VT/10, длина 16 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп./шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

7. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе: TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер VT/15, длина 16 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

8. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе: TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер VT/19, длина 16 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

[illegible]

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

[illegible]

 ООО ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

88. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе: TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер S1, длина 31 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

89. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе: TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер S2, длина 31 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

90. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе: TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F1, длина 31 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

91. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе: TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F2, длина 31 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

92. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе: TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F3, длина 31 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

II. BLUE STORM Rotary Endo Files/БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, варианты исполнения:

1. BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы в составе:

- BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, размер 06/15, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.

- BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.

- BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

2. BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы в составе:

- BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, размер 6/15, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.

- BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.

- BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

3. BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы в составе:

- BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, размер 06/15, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.

- BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.

- BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

4. Набор BLUE STORM Rotary Endo Files в составе:

- BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, размер 025/17, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.

- BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, размер 04/20, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.

- BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, размер 06/25, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.

- ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

[illegible]

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

ООО ЦРПМ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



 ООО ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦРПМ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

[illegible]

 ООО ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
- 3. Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы в составе:
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/15, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
- 4. Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы в составе:
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 025/17, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/20, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/25, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
- 5. Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы в составе:
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 025/17, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/20, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/25, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
- 6. Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы в составе:
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 025/17, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/20, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/25, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
- 7. Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы в составе:
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 10/20, длина 17 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/18, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/25, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/35, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
- 8. Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы в составе:
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 10/20, длина 17 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/18, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/25, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/35, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

9. Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы в составе:

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 10/20, длина 17 мм, никель-титан, 1 шт.

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/18, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/25, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/35, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

10. Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы в составе:

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 10/20, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 03/15, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/20, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/35, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

11. Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы в составе:

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 10/20, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 03/15, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/20, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/35, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

12. Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы в составе:

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 10/20, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 03/15, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/20, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/35, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

ООО ЦРПМ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

[illegible]

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

ООО ЦРПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

[illegible]

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦРПИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

[illegible]

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

221. Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы в составе: S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/40, длина 21 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ООО ЦРПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

1. Набор G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы в составе:

- G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 06/15, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.

- G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.

- G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/15, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.

- G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.

- ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/35, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
- 10. Набор G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы в составе:
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 10/20, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 03/15, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/20, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/35, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
- 11. Набор G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы в составе:
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 10/20, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 03/15, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/20, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/35, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
- 12. Набор G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы в составе:
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 10/20, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 03/15, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/20, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/35, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
- 13. Набор G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы в составе: G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 02/10, длина 21 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
- 14. Набор G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы в составе: G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 02/13, длина 21 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

[illegible]

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

ООО ЦРПМ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

[illegible]

 ООО ЦПМИ [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru) WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

[illegible]

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

[illegible]

[illegible]

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

[illegible]

ООО ЦРПМ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦРПМ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

301. Набор G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы в составе: G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 10/45, длина 17 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

ООО ЦРПМ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

[illegible]

354. Набор G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы в составе: G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 10/35, длина 31 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

355. Набор G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы в составе: G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 10/40, длина 31 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

356. Набор G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы в составе: G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 10/45, длина 31 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

357. Набор G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы в составе: G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 10/50, длина 31 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

358. Набор G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы в составе: G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 10/55, длина 31 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

359. Набор G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы в составе: G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 10/60, длина 31 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

V.SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, варианты исполнения:

1. Набор SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы в составе:

- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 02/20, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.

- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 02/25, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.

- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 025/17, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

2. Набор SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы в составе:

- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 02/20, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.

- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 02/25, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.

- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 025/17, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

3. Набор SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы в составе:

- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 02/20, длина 28 мм, никель-титан, 1 шт.

- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 02/25, длина 28 мм, никель-титан, 1 шт.

- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 025/17, длина 28 мм, никель-титан, 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

4. Набор SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы в составе:

- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 02/20, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.

- ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/30, длина 19 мм, никель-титан, 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

3. Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини в составе: Rotary Endo Files Mini/ Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/20, длина 16 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

4. Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини в составе: Rotary Endo Files Mini/ Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/25, длина 16 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

5. Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини в составе: Rotary Endo Files Mini/ Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/30, длина 16 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

6. Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини в составе: Rotary Endo Files Mini/ Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/35, длина 16 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

7. Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини в составе: Rotary Endo Files Mini/ Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/40, длина 16 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

8. Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини в составе: Rotary Endo Files Mini/ Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/20, длина 19 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

9. Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини в составе: Rotary Endo Files Mini/ Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/25, длина 19 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

10. Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини в составе: Rotary Endo Files Mini/ Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/30, длина 19 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

11. Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини в составе: Rotary Endo Files Mini/ Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/35, длина 19 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

12. Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини в составе: Rotary Endo Files Mini/ Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/40, длина 19 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

2. Сведения о производителе.

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд).

Адрес: No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай).

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд), является профессиональным производителем стоматологического оборудования и компонентов. Компанией получен сертификат ISO 13485:2016, EN ISO 13485:2016, выданный SGS United Kingdom Ltd.

3. Сведения об уполномоченном представителе.

Уполномоченным представителем производителя на территории Российской Федерации является Общество с ограниченной ответственностью «ЭНДОМАРКЕТ» (ООО "ЭНДОМАРКЕТ"). Адрес: Россия, 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

4. Назначение медицинского изделия, целевые потребители.

Механическая обработка и obturation корневых каналов при лечении зубов. Пациенты: любого пола, возраст – 18 лет и старше.

5. Область применения.

Изделие используется при эндодонтическом лечении в стоматологии. Использование изделия предусмотрено и допустимо только квалифицированным врачом-стоматологом или врачом-эндодонтистом, обладающим специальными навыками в обработке корневых каналов.

6. Показания к применению.

Инструменты показаны для эндодонтического лечения. Показания к эндодонтическому лечению являются:

- пульпиты и периодонтиты временных и постоянных зубов;
- удаление инфицированного дентина, преддентина и остатков пульпы из корневых каналов и их формирования путем постоянных вращательных движений внутри корневого канала;
- обратимые (гиперемия) и необратимые (воспаление) изменения пульпы;
- некроз пульпы без клинических симптомов и при их наличии, без рентгенологических признаков периапикальной патологии при наличии деструктивных изменений в костной ткани;
- депульпирование зуба по ортопедическим показаниям;
- плановая резекция корня или гемисекция;
- повторное лечение корневого канала (перелечивание) вследствие:
 - 1) перфорации дна полости зуба, корневого канала;
 - 2) не утихающих болей (не менее 7 дней) после полноценной obturation и проведения симптоматической терапии;
 - 3) облитерации корневого канала сильно искривленного корня с деструктивными изменениями у верхушки (подтверждено рентгенологически) после неудачной попытки инструментального прохождения.

7. Противопоказания.

Имеются абсолютные и относительные противопоказания для эндодонтического лечения.

Абсолютные:

- зуб подлежит удалению по ортодонтическим и/или иным причинам;
- продольный перелом корня зуба;
- наличие кисты или иного образования в области корня зуба (остеомиелит, онкология и прочее).

Относительные:

- значительные искривления корневых каналов;
- непроходимость корневого канала, в том числе из-за наличия трудноизвлекаемого пломбировочного материала;
- наличие в просвете корневого канала инородных предметов;
- перфорация стенок корня зуба;
- гипертонический криз;
- 12-месячный период после перенесенного инфаркта миокарда;
- сведение челюстей различного генеза;
- эпилептический статус;
- общее тяжелое состояние пациента;
- неполноценность психики пациента, затрудняющая контакт.

8. Возможные побочные действия.

Имеются риски осложнений и побочных действий эндодонтического вмешательства, такие как:

- перфорация стенки корня зуба;
- аллергическая реакция пациента на никель при использовании никельсодержащих инструментов;
- болевые ощущения;
- неполное заполнение корневого канала зуба пломбировочным материалом, наличие пустот;
- вывод чрезмерного количества пломбировочного материала за верхушку корня в периодонт;
- отлом инструмента в корневом канале;
- проталкивание инфицированных тканей за верхушку корня в периодонт;

9. Описание изделия.

Дентальные инструменты для корневых каналов включают инструменты, выполненные из никель-титанового сплава.

Никель-титановые инструменты имеют свойство «памяти», что позволяет инструментам возвращаться к первоначальной форме после деформации, сгибания или скручивания, что облегчает следование изгибам изогнутого корневого канала. Высокая усталостная выносливость сплава при нагрузках значительно уменьшает вероятность отлома инструмента в корневом канале.

Машинные инструменты устанавливаются в стоматологический наконечник, работающий от микромотора.

9.1. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан.

Каждый набор инструментов включает ротационные файлы из никель-титанового сплава. Каждый файл состоит из хвостовика и оперативной части, которая изготовлена из специального никель-титанового сплава с памятью формы. На основании оперативной части находится стоппер, который используется для обозначения рабочей длины файла. Штрих на стоппере идентифицирует оригинальное направление наконечника в корневом канале.

Изделия из набора используются при подключении к активному медицинскому оборудованию (эндодонтический вращающийся наконечник, угловой наконечник с понижающим числом оборотов, диаметр 2,35 мм) и совершает вращательные движения с рекомендованной скоростью 400 оборотов в минуту с целью расширения корневого канала. Высокоэффективны для удаления инфицированного дентина с поверхности корневых каналов за счет режущей грани.

Изделия из наборов являются многоразовыми и выдерживают до 10 использований.

Общий вид изделий, входящих в наборы, представлен на рисунке 1.


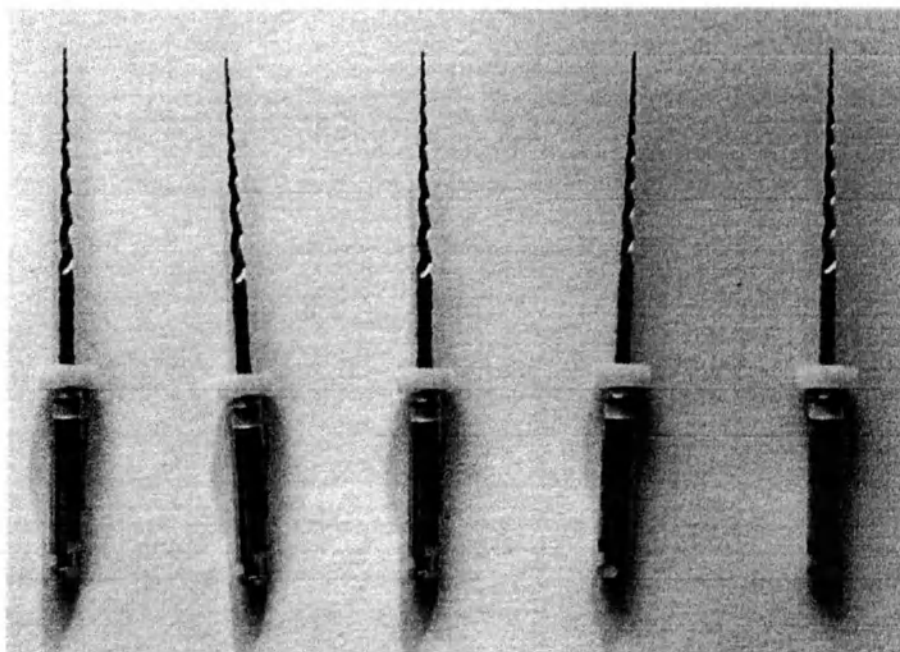


Рисунок 1. Общий вид изделий из набора TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан.

Габаритные характеристики изделий, входящих в наборы TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан, указаны в таблице 1, чертеже 1.


Масса изделий, входящих в наборы TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан, указана в таблице 1.

TAPER FILE Nickel Titanium

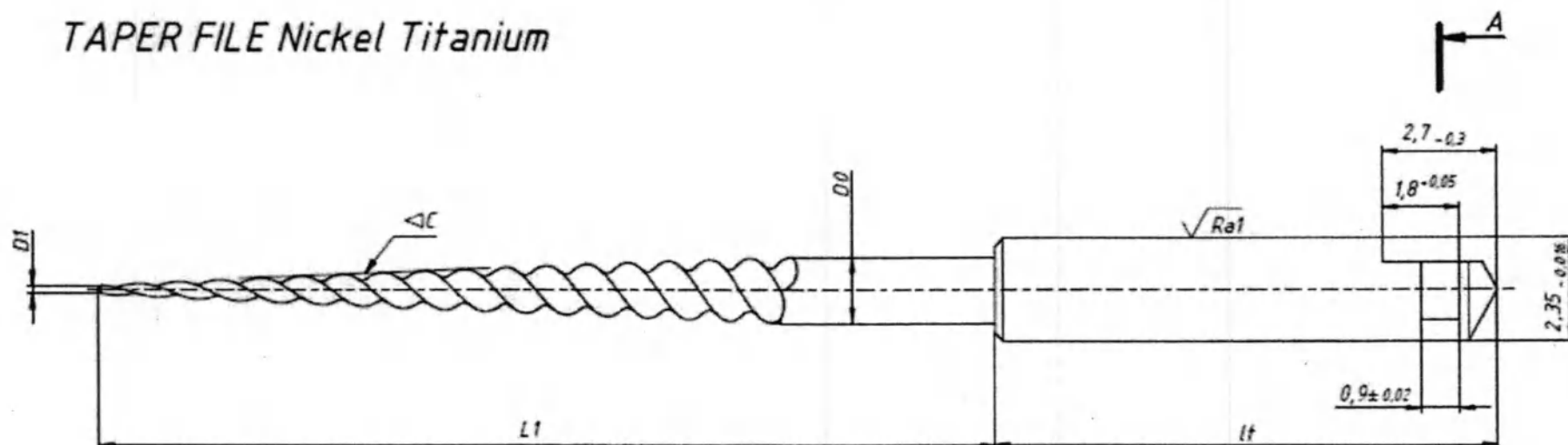

1. Твердость оперативная часть HRC45
2. Шероховатость оперативная часть Ra0.8
3. Габаритные характеристики изделий, входящих в наборы TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан, указаны в таблице 1

Обозначения на чертеже:
 Длина оперативной части L1
 Базовый диаметр D0
 Апикальное сужение D1
 Конусность C
 Длина хвостовика lt = 11, 13, 2 мм

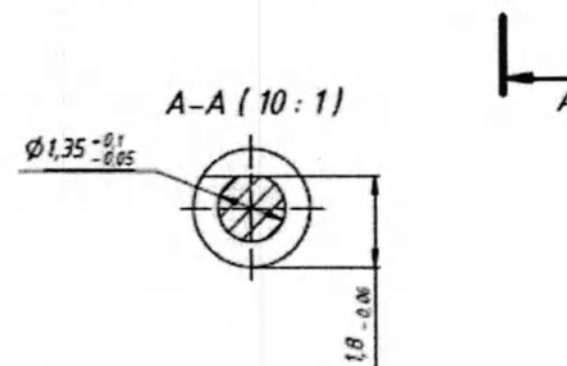

Чертеж 1. TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан.

Таблица 1. Габаритные характеристики и масса изделий, входящих в наборы TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан

№	Наименование	Размер	Цветовая кодировка хвостовика	Цвет стоп-пера	Длина рабочей части, L1, мм.	Базовый диаметр рабочей части D0, мм.	Апикальное сужение D1, мм.	Конусность, С %, ± 0,05	Масса, г	Устойчивость к разрушению при скручивании и угловом отклонении		Изгибающий момент гс см, не более	Форма поперечного сечения	Тип инструмента
										Сопротивление разрушению (крутящий момент), гс см, мин.	Градусы углового отклонения (°), мин			
1	TAPER FILE Nickel Titanium	VT/10	фиолетовый	фиолетовый	16±0,02	1,2±0,5	0,1±0,02	12	0,38±0,07	6	360	25	△	Тип К
2		VT/15	белый	белый	16±0,02	1,2±0,5	0,15±0,02	7	0,38±0,07	8	360	50	△	Тип К
3		VT/19	желтый	желтый	16±0,02	1,2±0,5	0,19±0,02	5	0,38±0,07	10	360	75	△	Тип К
4		VT/20	желтый	желтый	16±0,02	1,2±0,5	0,2±0,02	5	0,38±0,07	18	360	80	△	Тип К
5		VT/25	красный	красный	16±0,02	1,2±0,5	0,25±0,02	4	0,38±0,07	30	360	120	△	Тип К
6		VT/30	синий	синий	16±0,02	1,2±0,5	0,3±0,02	4	0,38±0,07	45	360	150	△	Тип К
7		VT/35	зеленый	зеленый	16±0,02	1,2±0,5	0,35±0,02	4	0,38±0,07	65	360	190	△	Тип К
8		VT/40	черный	черный	16±0,02	1,2±0,5	0,4±0,02	4	0,38±0,07	100	360	250	△	Тип К
9		VT/45	белый	белый	16±0,02	1,2±0,5	0,45±0,02	4	0,38±0,07	120	360	360	△	Тип К
10		VT/50	желтый	желтый	16±0,02	1,2±0,5	0,5±0,02	4	0,38±0,07	170	360	450	△	Тип К
11		VT/55	красный	красный	16±0,02	1,2±0,5	0,55±0,02	4	0,38±0,07	195	360	550	△	Тип К
12		VT/10	фиолетовый	фиолетовый	19±0,02	1,2±0,5	0,1±0,02	12	0,38±0,07	6	360	25	△	Тип К
13		VT/15	белый	белый	19±0,02	1,2±0,5	0,15±0,02	7	0,38±0,07	8	360	50	△	Тип К
14		VT/19	желтый	желтый	19±0,02	1,2±0,5	0,19±0,02	5	0,38±0,07	10	360	75	△	Тип К
15		VT/20	желтый	желтый	19±0,02	1,2±0,5	0,2±0,02	5	0,38±0,07	18	360	80	△	Тип К
16		VT/25	красный	красный	19±0,02	1,2±0,5	0,25±0,02	4	0,38±0,07	30	360	120	△	Тип К
17		VT/30	синий	синий	19±0,02	1,2±0,5	0,3±0,02	4	0,38±0,07	45	360	150	△	Тип К
18		VT/35	зеленый	зеленый	19±0,02	1,2±0,5	0,35±0,02	4	0,38±0,07	65	360	190	△	Тип К
19		VT/40	черный	черный	19±0,02	1,2±0,5	0,4±0,02	4	0,38±0,07	100	360	250	△	Тип К
20		VT/45	белый	белый	19±0,02	1,2±0,5	0,45±0,02	4	0,38±0,07	120	360	360	△	Тип К
21		VT/50	желтый	желтый	19±0,02	1,2±0,5	0,5±0,02	4	0,38±0,07	170	360	450	△	Тип К
22		VT/55	красный	красный	19±0,02	1,2±0,5	0,55±0,02	4	0,38±0,07	195	360	550	△	Тип К
23		VT/10	фиолетовый	фиолетовый	21±0,02	1,2±0,5	0,1±0,02	12	0,38±0,07	6	360	25	△	Тип К
24		VT/15	белый	белый	21±0,02	1,2±0,5	0,15±0,02	7	0,38±0,07	8	360	50	△	Тип К
25		VT/19	желтый	желтый	21±0,02	1,2±0,5	0,19±0,02	5	0,38±0,07	10	360	75	△	Тип К
26		VT/20	желтый	желтый	21±0,02	1,2±0,5	0,2±0,02	5	0,38±0,07	18	360	80	△	Тип К
27		VT/25	красный	красный	21±0,02	1,2±0,5	0,25±0,02	4	0,38±0,07	30	360	120	△	Тип К
28		VT/30	синий	синий	21±0,02	1,2±0,5	0,3±0,02	4	0,38±0,07	45	360	150	△	Тип К
29		VT/35	зеленый	зеленый	21±0,02	1,2±0,5	0,35±0,02	4	0,38±0,07	65	360	190	△	Тип К
30		VT/40	черный	черный	21±0,02	1,2±0,5	0,4±0,02	4	0,38±0,07	100	360	250	△	Тип К
31		VT/45	белый	белый	21±0,02	1,2±0,5	0,45±0,02	4	0,38±0,07	120	360	360	△	Тип К
32		VT/50	желтый	желтый	21±0,02	1,2±0,5	0,5±0,02	4	0,38±0,07	170	360	450	△	Тип К
33		VT/55	красный	красный	21±0,02	1,2±0,5	0,55±0,02	4	0,38±0,07	195	360	550	△	Тип К
34		VT/10	фиолетовый	фиолетовый	25±0,02	1,2±0,5	0,1±0,02	12	0,38±0,07	6	360	25	△	Тип К
35		VT/15	белый	белый	25±0,02	1,2±0,5	0,15±0,02	7	0,38±0,07	8	360	50	△	Тип К

36	VT/19	желтый	желтый	25±0,02	±0,5	0,19±0,02	5	0,38±0,07	10	360	75	△	Тип К
37	VT/20	желтый	желтый	25±0,02	1,2±0,5	0,2±0,02	5	0,38±0,07	18	360	80	△	Тип К
38	VT/25	красный	красный	25±0,02	1,2±0,5	0,25±0,02	4	0,38±0,07	30	360	120	△	Тип К
39	VT/30	синий	синий	25±0,02	1,2±0,5	0,3±0,02	4	0,38±0,07	45	360	150	△	Тип К
40	VT/35	зеленый	зеленый	25±0,02	1,2±0,5	0,35±0,02	4	0,38±0,07	65	360	190	△	Тип К
41	VT/40	черный	черный	25±0,02	1,2±0,5	0,4±0,02	4	0,38±0,07	100	360	250	△	Тип К
42	VT/45	белый	белый	25±0,02	1,2±0,5	0,45±0,02	4	0,38±0,07	120	360	360	△	Тип К
43	VT/50	желтый	желтый	25±0,02	1,2±0,5	0,5±0,02	4	0,38±0,07	170	360	450	△	Тип К
44	VT/55	красный	красный	25±0,02	1,2±0,5	0,55±0,02	4	0,38±0,07	195	360	550	△	Тип К
45	VT/10	фиолетовый	фиолетовый	28±0,02	1,2±0,5	0,1±0,02	12	0,38±0,07	6	360	25	△	Тип К
46	VT/15	белый	белый	28±0,02	1,2±0,5	0,15±0,02	12	0,38±0,07	8	360	50	△	Тип К
47	VT/19	желтый	желтый	28±0,02	1,2±0,5	0,19±0,02	5	0,38±0,07	10	360	75	△	Тип К
48	VT/20	желтый	желтый	28±0,02	1,2±0,5	0,2±0,02	7	0,38±0,07	18	360	80	△	Тип К
49	VT/25	красный	красный	28±0,02	1,2±0,5	0,25±0,02	5	0,38±0,07	30	360	120	△	Тип К
50	VT/30	синий	синий	28±0,02	1,2±0,5	0,3±0,02	4	0,38±0,07	45	360	150	△	Тип К
51	VT/35	зеленый	зеленый	28±0,02	1,2±0,5	0,35±0,02	4	0,38±0,07	65	360	190	△	Тип К
52	VT/40	черный	черный	28±0,02	1,2±0,5	0,4±0,02	4	0,38±0,07	100	360	250	△	Тип К
53	VT/45	белый	белый	28±0,02	1,2±0,5	0,45±0,02	4	0,38±0,07	120	360	360	△	Тип К
54	VT/50	желтый	желтый	28±0,02	1,2±0,5	0,5±0,02	4	0,38±0,07	170	360	450	△	Тип К
55	VT/55	красный	красный	28±0,02	1,2±0,5	0,55±0,02	4	0,38±0,07	195	360	550	△	Тип К
56	VT/10	фиолетовый	фиолетовый	31±0,02	1,2±0,5	0,1±0,02	12	0,38±0,07	6	360	25	△	Тип К
57	VT/15	белый	белый	31±0,02	1,2±0,5	0,15±0,02	7	0,38±0,07	8	360	50	△	Тип К
58	VT/19	желтый	желтый	31±0,02	1,2±0,5	0,19±0,02	5	0,38±0,07	10	360	75	△	Тип К
59	VT/20	желтый	желтый	31±0,02	1,2±0,5	0,2±0,02	5	0,38±0,07	18	360	80	△	Тип К
60	VT/25	красный	красный	31±0,02	1,2±0,5	0,25±0,02	4	0,38±0,07	30	360	120	△	Тип К
61	VT/30	синий	синий	31±0,02	1,2±0,5	0,3±0,02	4	0,38±0,07	45	360	150	△	Тип К
62	VT/35	зеленый	зеленый	31±0,02	1,2±0,5	0,35±0,02	4	0,38±0,07	65	360	190	△	Тип К
63	VT/40	черный	черный	31±0,02	1,2±0,5	0,4±0,02	4	0,38±0,07	100	360	250	△	Тип К
64	VT/45	белый	белый	31±0,02	1,2±0,5	0,45±0,02	4	0,38±0,07	120	360	360	△	Тип К
65	VT/50	желтый	желтый	31±0,02	1,2±0,5	0,5±0,02	4	0,38±0,07	170	360	450	△	Тип К
66	VT/55	красный	красный	31±0,02	1,2±0,5	0,55±0,02	4	0,38±0,07	195	360	550	△	Тип К
67	SX	бесцветный	желтый	19±0,02	1,2±0,5	0,19±0,02	15	0,38±0,07	10	360	75	△	Тип К
68	S1	фиолетовый	фиолетовый	21±0,02	1,2±0,5	0,185±0,02	11	0,38±0,07	8	360	50	△	Тип К
69	S2	белый	белый	21±0,02	1,2±0,5	0,2±0,02	11,5	0,38±0,07	18	360	80	△	Тип К
70	F1	желтый	желтый	21±0,02	1,2±0,5	0,2±0,02	7	0,38±0,07	18	360	80	△	Тип К
71	F2	красный	красный	21±0,02	1,2±0,5	0,25±0,02	8	0,38±0,07	30	360	120	△	Тип К
72	F3	синий	синий	21±0,02	1,2±0,5	0,3±0,02	9	0,38±0,07	45	360	150	△	Тип К
73	S1	фиолетовый	фиолетовый	25±0,02	1,2±0,5	0,185±0,02	9	0,38±0,07	8	360	50	△	Тип К
74	S2	белый	белый	25±0,02	1,2±0,5	0,2±0,02	11,5	0,38±0,07	18	360	50	△	Тип К
75	F1	желтый	желтый	25±0,02	1,2±0,5	0,2±0,02	7	0,38±0,07	18	360	50	△	Тип К
76	F2	красный	красный	25±0,02	1,2±0,5	0,25±0,02	8	0,38±0,07	30	360	120	△	Тип К

77		F3	синий	синий	25±0,02	1,2±0,5	0,3±0,02	9	0,38±0,07	45	360	150	Δ	Тип К
78		S1	фиолетовый	фиолетовый	28±0,02	1,2±0,5	0,185±0,02	11	0,38±0,07	8	360	50	Δ	Тип К
79		S2	белый	белый	28±0,02	1,2±0,5	0,2±0,02	11,5	0,38±0,07	18	360	80	Δ	Тип К
80		F1	желтый	желтый	28±0,02	1,2±0,5	0,2±0,02	7	0,38±0,07	18	360	80	Δ	Тип К
81		F2	красный	красный	28±0,02	1,2±0,5	0,25±0,02	8	0,38±0,07	30	360	120	Δ	Тип К
82		F3	синий	синий	28±0,02	1,2±0,5	0,3±0,02	9	0,38±0,07	45	360	150	Δ	Тип К
83		S1	фиолетовый	фиолетовый	31±0,02	1,2±0,5	0,185±0,02	11	0,38±0,07	8	360	50	Δ	Тип К
84		S2	белый	белый	31±0,02	1,2±0,5	0,2±0,02	11,5	0,38±0,07	18	360	80	Δ	Тип К
85		F1	желтый	желтый	31±0,02	1,2±0,5	0,2±0,02	7	0,38±0,07	18	360	80	Δ	Тип К
86		F2	красный	красный	31±0,02	1,2±0,5	0,25±0,02	8	0,38±0,07	30	360	120	Δ	Тип К
87		F3	синий	синий	31±0,02	1,2±0,5	0,3±0,02	9	0,38±0,07	45	360	150	Δ	Тип К

9.2. BLUE STORM Rotary Endo Files/БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы.

Каждый набор инструментов включает ротационные файлы из никель-титанового сплава. Файл состоит из хвостовика и оперативной части, которая изготовлена из специального никель-титанового сплава с памятью формы. На основании оперативной части расположен стоппер, который используется для обозначения рабочей длины файла. Штрих на стоппере идентифицирует оригинальное направление наконечника в корневом канале.

Набор инструментов используется при подключении к активному медицинскому оборудованию (эндодонтический вращающийся наконечник, угловой наконечник с понижающим числом оборотов, диаметр 2,35 мм) и совершает вращательные движения с рекомендованной скоростью 400 оборотов в минуту с целью расширения корневого канала. Высокоэффективны для удаления инфицированного дентина с поверхности корневых каналов за счет режущей грани.

Изделия из наборов являются многоразовыми и выдерживают до 10 использований.

Общий вид изделий, входящих в наборы, представлен на рисунке 2.


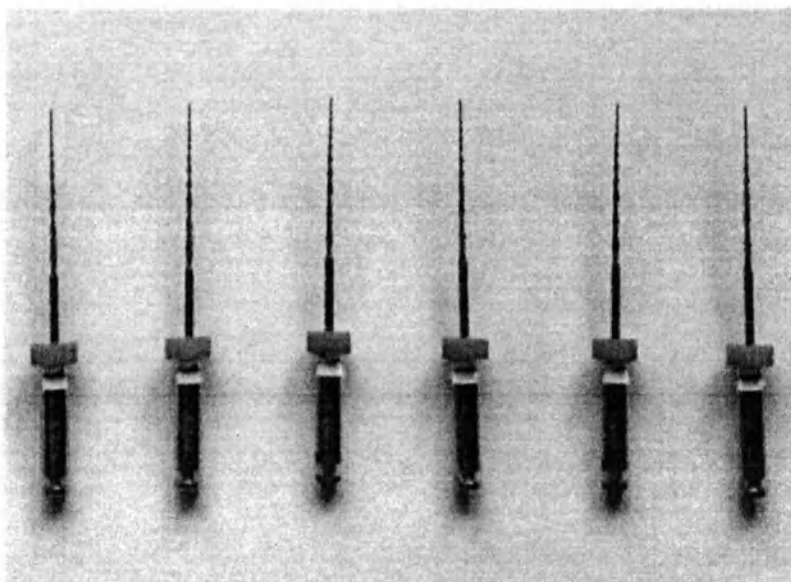


Рисунок 2. Общий вид изделий из наборов BLUE STORM Rotary Endo Files/БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы

Габаритные характеристики изделий, входящих в наборы файлов BLUE STORM Rotary Endo Files/БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, указаны в таблице 2, чертеже 2.

Масса изделий, входящих в наборы файлов BLUE STORM Rotary Endo Files/БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, указана в таблице 2.

BLUE STORM Rotary Endo Files

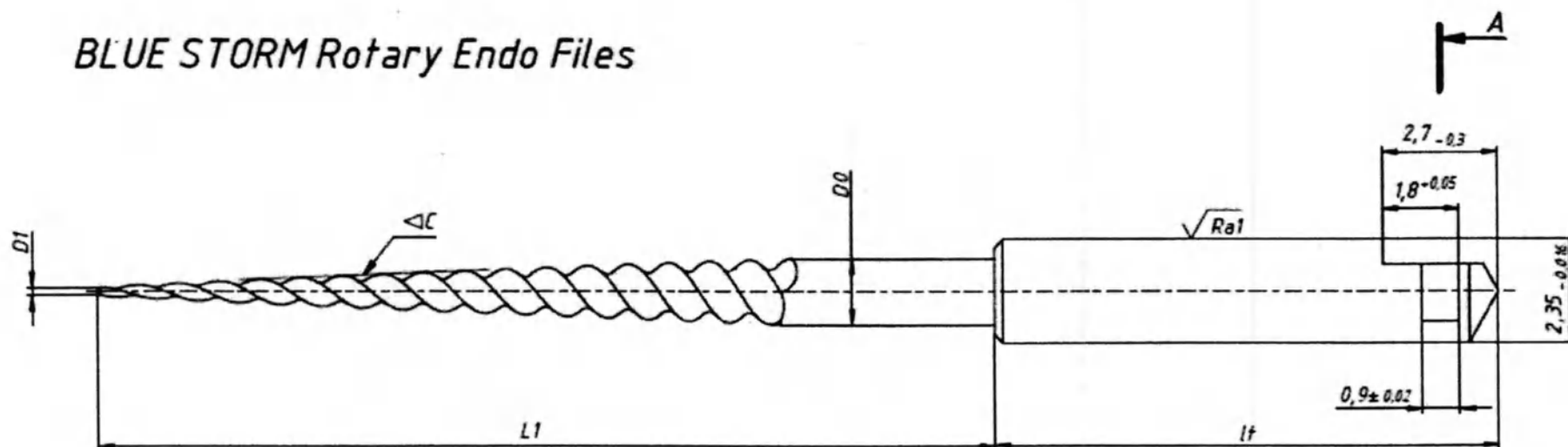

1. Твердость оперативная часть HRC35
2. Шероховатость оперативная часть Ra0.8
3. Габаритные характеристики изделий, входящих в наборы файлов BLUE STORM Rotary Endo Files/БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, указаны в таблице 3

Обозначения на чертеже:

Длина оперативной части L1

Базовый диаметр D0

Апикальное сужение D1

Конусность C

Длина хвостовика It = 11..13,2 мм

Чертеж 2. BLUE STORM Rotary Endo Files/БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы.

Таблица 2. Габаритные характеристики и масса изделий в наборе файлов BLUE STORM Rotary Endo Files/БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы

№	Наименование	Размер	Цветовая кодировка хвостовика	Цвет стоппера	Длина рабочей части L1, мм.	Базовый диаметр рабочей части D0, мм.	Апикальное сужение D1, мм.	Конусность, С %, $\pm 0,05$	Масса, г.	Устойчивость к разрушению при скручивании и угловом отклонении		Изгибающий момент гс см не более	Форма поперечного сечения	Тип инструмента
										Сопротивление разрушению (крутящий момент) гс см, мин.	Градусы углового отклонения (°), мин			
	BLUE STORM Rotary Endo Files													
1		02/10	фиолетовый	фиолетовый	19 $\pm$ 0,02	0,8 $\pm$ 0,5	0,100 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	6	360	25	□	Тип К
2		02/13	синий		19 $\pm$ 0,02	0,8 $\pm$ 0,5	0,130 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	7	360	30	□	Тип К
3		02/15	белый		19 $\pm$ 0,02	0,8 $\pm$ 0,5	0,150 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	8	360	50	□	Тип К
4		02/17	черный		19 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,170 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	9	360	65	□	Тип К
5		02/19	желтый		19 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,190 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	10	360	75	□	Тип К
6		02/20	желтый		19 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,200 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	18	360	80	□	Тип К
7		02/25	красный		19 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,250 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	30	360	120	□	Тип К
8		02/30	синий		19 $\pm$ 0,02	1,2 $\pm$ 0,5	0,300 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	45	360	150	□	Тип К
9		02/35	зеленый		19 $\pm$ 0,02	1,2 $\pm$ 0,5	0,350 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	65	360	190	□	Тип К
10		02/40	черный		19 $\pm$ 0,02	1,2 $\pm$ 0,5	0,400 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	100	360	250	□	Тип К
11		02/45	белый		19 $\pm$ 0,02	1,2 $\pm$ 0,5	0,450 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	120	360	360	□	Тип К
12		02/50	желтый		19 $\pm$ 0,02	1,2 $\pm$ 0,5	0,500 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	170	360	450	□	Тип К
13		02/55	красный		19 $\pm$ 0,02	1,2 $\pm$ 0,5	0,550 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	195	360	550	□	Тип К
14		02/60	синий		19 $\pm$ 0,02	1,2 $\pm$ 0,5	0,600 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	250	360	690	□	Тип К
15		02/65	зеленый		19 $\pm$ 0,02	1,2 $\pm$ 0,5	0,650 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	320	360	780	□	Тип К
16		02/70	черный		19 $\pm$ 0,02	1,2 $\pm$ 0,5	0,700 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	450	360	890	□	Тип К
17		02/10	фиолетовый	белый	21 $\pm$ 0,02	0,8 $\pm$ 0,5	0,100 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	6	360	25	□	Тип К
18		02/13	синий		21 $\pm$ 0,02	0,8 $\pm$ 0,5	0,130 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	7	360	30	□	Тип К
19		02/15	белый		21 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,150 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	8	360	50	□	Тип К
20		02/17	черный		21 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,170 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	9	360	65	□	Тип К
21		02/19	желтый		21 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,190 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	10	360	75	□	Тип К
22		02/20	желтый		21 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,200 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	18	360	80	□	Тип К
23		02/25	красный		21 $\pm$ 0,02	1,2 $\pm$ 0,5	0,250 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	30	360	120	□	Тип К
24		02/30	синий		21 $\pm$ 0,02	1,2 $\pm$ 0,5	0,300 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	45	360	150	□	Тип К
25		02/35	зеленый		21 $\pm$ 0,02	1,2 $\pm$ 0,5	0,350 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	65	360	190	□	Тип К
26		02/40	черный		21 $\pm$ 0,02	1,2 $\pm$ 0,5	0,400 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	100	360	250	□	Тип К
27		02/40	белый		21 $\pm$ 0,02	1,2 $\pm$ 0,5	0,450 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	120	360	360	□	Тип К
28		02/50	желтый		21 $\pm$ 0,02	1,2 $\pm$ 0,5	0,500 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	170	360	450	□	Тип К
29		02/55	красный		21 $\pm$ 0,02	1,2 $\pm$ 0,5	0,550 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	195	360	550	□	Тип К
30		02/60	синий		21 $\pm$ 0,02	1,2 $\pm$ 0,5	0,600 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	250	360	690	□	Тип К
31		02/65	зеленый		21 $\pm$ 0,02	1,2 $\pm$ 0,5	0,650 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	320	360	780	□	Тип К
32		02/70	черный		21 $\pm$ 0,02	1,2 $\pm$ 0,5	0,700 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	450	360	890	□	Тип К
33		02/10	фиолетовый	желтый	25 $\pm$ 0,02	0,8 $\pm$ 0,5	0,100 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	6	360	25	□	Тип К
34		02/13	синий		25 $\pm$ 0,02	0,8 $\pm$ 0,5	0,130 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	7	360	30	□	Тип К
35		02/15	белый		25 $\pm$ 0,02	0,8 $\pm$ 0,5	0,150 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	8	360	50	□	Тип К
		02/17	черный		25 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,170 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	9	360	65	□	Тип К
		02/19	желтый		25 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,190 $\pm$ 0,02	2	0,38 $\pm$ 0,07	10	360	75	□	Тип К

38		02/20	желтый		25±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	2	0,38±0,07	18	360	80	□	Тип К
39		02/25	красный		25±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	2	0,38±0,07	30	360	120	□	Тип К
40		02/30	синий		25±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	2	0,38±0,07	45	360	150	□	Тип К
41		02/35	зеленый		25±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	2	0,38±0,07	65	360	190	□	Тип К
42		02/40	черный		25±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	2	0,38±0,07	100	360	250	□	Тип К
43		02/40	белый		25±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	2	0,38±0,07	120	360	360	□	Тип К
44		02/50	желтый		25±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	2	0,38±0,07	170	360	450	□	Тип К
45		02/55	красный		25±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	2	0,38±0,07	195	360	550	□	Тип К
46		02/60	синий		25±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	2	0,38±0,07	250	360	690	□	Тип К
47		02/65	зеленый		25±0,02	1,2±0,5	0,650±0,02	2	0,38±0,07	320	360	780	□	Тип К
48		02/70	черный		25±0,02	1,2±0,5	0,700±0,02	2	0,38±0,07	450	360	890	□	Тип К
49		025/10	фиолетовый		19±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	2,5	0,38±0,07	6	360	25	□	Тип К
50		025/13	синий		19±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	2,5	0,38±0,07	7	360	30	□	Тип К
51		025/15	белый		19±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	2,5	0,38±0,07	8	360	50	□	Тип К
52		025/17	черный		19±0,02	1,0±0,5	0,170±0,02	2,5	0,38±0,07	9	360	65	□	Тип К
53		025/19	желтый		19±0,02	1,0±0,5	0,190±0,02	2,5	0,38±0,07	10	360	75	□	Тип К
54		025/20	желтый		19±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	2,5	0,38±0,07	18	360	80	□	Тип К
55		025/10	фиолетовый	белый	21±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	2,5	0,38±0,07	6	360	25	□	Тип К
56		025/13	синий		21±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	2,5	0,38±0,07	7	360	30	□	Тип К
57		025/15	белый		21±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	2,5	0,38±0,07	8	360	50	□	Тип К
58		025/17	белый		21±0,02	1,0±0,5	0,170±0,02	2,5	0,38±0,07	9	360	65	□	Тип К
59		025/19	желтый		21±0,02	1,0±0,5	0,190±0,02	2,5	0,38±0,07	10	360	75	□	Тип К
60		025/20	желтый		21±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	2,5	0,38±0,07	18	360	80	□	Тип К
61		025/10	фиолетовый		25±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	2,5	0,38±0,07	6	360	25	□	Тип К
62		025/13	синий		25±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	2,5	0,38±0,07	7	360	30	□	Тип К
63		025/15	белый		25±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	2,5	0,38±0,07	8	360	50	□	Тип К
64		025/17	черный		25±0,02	1,0±0,5	0,170±0,02	2,5	0,38±0,07	9	360	65	□	Тип К
65		025/19	желтый		25±0,02	1,0±0,5	0,190±0,02	2,5	0,38±0,07	10	360	75	□	Тип К
66		025/20	желтый		25±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	2,5	0,38±0,07	18	360	80	□	Тип К
67		025/10	фиолетовый		28±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	2,5	0,38±0,07	6	360	25	□	Тип К
68		025/13	синий		28±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	2,5	0,38±0,07	7	360	30	□	Тип К
69		025/15	белый		28±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	2,5	0,38±0,07	8	360	50	□	Тип К
70		025/17	черный		28±0,02	1,0±0,5	0,170±0,02	2,5	0,38±0,07	9	360	65	□	Тип К
71		025/19	желтый		28±0,02	1,0±0,5	0,190±0,02	2,5	0,38±0,07	10	360	75	□	Тип К
72		025/20	желтый		28±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	2,5	0,38±0,07	18	360	80	□	Тип К
73		025/10	фиолетовый		31±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	2,5	0,38±0,07	6	360	25	□	Тип К
74		025/13	синий		31±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	2,5	0,38±0,07	7	360	30	□	Тип К
75		025/15	белый		31±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	2,5	0,38±0,07	8	360	50	□	Тип К
76		025/17	белый		31±0,02	1,0±0,5	0,170±0,02	2,5	0,38±0,07	9	360	65	□	Тип К
77		025/19	желтый		31±0,02	1,0±0,5	0,190±0,02	2,5	0,38±0,07	10	360	75	□	Тип К
78		025/20	желтый		31±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	2,5	0,38±0,07	18	360	80	□	Тип К
79		03/10	фиолетовый		19±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	3	0,38±0,07	6	360	25	□	Тип К
80		03/13	синий		19±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	3	0,38±0,07	7	360	30	□	Тип К
81		03/15	белый		19±0,02	1,0±0,5	0,150±0,02	3	0,38±0,07	8	360	50	□	Тип К
82		03/17	черный		19±0,02	1,0±0,5	0,170±0,02	3	0,38±0,07	9	360	65	□	Тип К
83		03/19	желтый		19±0,02	1,0±0,5	0,190±0,02	3	0,38±0,07	10	360	75	□	Тип К

84		03/20	желтый		19±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	3	0,38±0,07	18	360	80	□	Тип К
85		03/25	красный		19±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	3	0,38±0,07	30	360	120	□	Тип К
86		03/30	синий		19±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	3	0,38±0,07	45	360	150	□	Тип К
87		03/35	зеленый		19±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	3	0,38±0,07	65	360	190	□	Тип К
88		03/40	черный		19±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	3	0,38±0,07	100	360	250	□	Тип К
89		03/45	белый		19±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	3	0,38±0,07	120	360	360	□	Тип К
90		03/50	Желтый		19±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	3	0,38±0,07	170	360	450	□	Тип К
91		03/55	красный		19±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	3	0,38±0,07	195	360	550	□	Тип К
92		03/10	фиолетовый		21±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	3	0,38±0,07	6	360	25	□	Тип К
93		03/13	синий		21±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	3	0,38±0,07	7	360	30	□	Тип К
94		03/15	белый		21±0,02	1,0±0,5	0,150±0,02	3	0,38±0,07	8	360	50	□	Тип К
95		03/17	черный		21±0,02	1,0±0,5	0,170±0,02	3	0,38±0,07	9	360	65	□	Тип К
96		03/19	желтый		21±0,02	1,0±0,5	0,190±0,02	3	0,38±0,07	10	360	75	□	Тип К
97		03/20	желтый		21±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	3	0,38±0,07	18	360	80	□	Тип К
98		03/25	красный	белый	21±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	3	0,38±0,07	30	360	120	□	Тип К
99		03/30	синий		21±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	3	0,38±0,07	45	360	150	□	Тип К
100		03/35	зеленый		21±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	3	0,38±0,07	65	360	190	□	Тип К
101		03/40	черный		21±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	3	0,38±0,07	100	360	250	□	Тип К
102		03/45	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	3	0,38±0,07	120	360	360	□	Тип К
103		03/50	Желтый		21±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	3	0,38±0,07	170	360	450	□	Тип К
104		03/55	красный		21±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	3	0,38±0,07	195	360	550	□	Тип К
105		03/10	фиолетовый		25±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	3	0,38±0,07	6	360	25	□	Тип К
106		03/13	синий		25±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	3	0,38±0,07	7	360	30	□	Тип К
107		03/15	белый		25±0,02	1,0±0,5	0,150±0,02	3	0,38±0,07	8	360	50	□	Тип К
108		03/17	черный		25±0,02	1,0±0,5	0,170±0,02	3	0,38±0,07	9	360	65	□	Тип К
109		03/19	желтый		25±0,02	1,0±0,5	0,190±0,02	3	0,38±0,07	10	360	75	□	Тип К
110		03/20	желтый		25±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	3	0,38±0,07	18	360	80	□	Тип К
111		03/25	красный	желтый	25±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	3	0,38±0,07	30	360	120	□	Тип К
112		03/30	синий		25±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	3	0,38±0,07	45	360	150	□	Тип К
113		03/35	зеленый		25±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	3	0,38±0,07	65	360	190	□	Тип К
114		03/40	черный		25±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	3	0,38±0,07	100	360	250	□	Тип К
115		03/45	белый		25±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	3	0,38±0,07	120	360	360	□	Тип К
116		03/50	Желтый		25±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	3	0,38±0,07	170	360	450	□	Тип К
117		03/55	красный		25±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	3	0,38±0,07	195	360	550	□	Тип К
118		03/10	фиолетовый		28±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	3	0,38±0,07	6	360	25	□	Тип К
119		03/13	синий		28±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	3	0,38±0,07	7	360	30	□	Тип К
120		03/15	белый		28±0,02	1,0±0,5	0,150±0,02	3	0,38±0,07	8	360	50	□	Тип К
121		03/17	черный	красный	28±0,02	1,0±0,5	0,170±0,02	3	0,38±0,07	9	360	65	□	Тип К
122		03/19	желтый		28±0,02	1,0±0,5	0,190±0,02	3	0,38±0,07	10	360	75	□	Тип К
123		03/20	желтый		28±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	3	0,38±0,07	18	360	80	□	Тип К
124		03/25	красный		28±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	3	0,38±0,07	30	360	120	□	Тип К

125		03/30	синий		28±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	3	0,38±0,07	45	360	150	□	Тип К
126		03/35	зеленый		28±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	3	0,38±0,07	65	360	190	□	Тип К
127		03/40	черный		28±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	3	0,38±0,07	100	360	250	□	Тип К
128		03/45	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	3	0,38±0,07	120	360	360	□	Тип К
129		03/50	Желтый		28±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	3	0,38±0,07	170	360	450	□	Тип К
130		03/55	красный		28±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	3	0,38±0,07	195	360	550	□	Тип К
131		03/10	фиолетовый		31±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	3	0,38±0,07	6	360	25	□	Тип К
132		03/13	синий		31±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	3	0,38±0,07	7	360	30	□	Тип К
133		03/15	белый		31±0,02	1,0±0,5	0,150±0,02	3	0,38±0,07	8	360	50	□	Тип К
134		03/17	черный		31±0,02	1,0±0,5	0,170±0,02	3	0,38±0,07	9	360	65	□	Тип К
135		03/19	желтый		31±0,02	1,0±0,5	0,190±0,02	3	0,38±0,07	10	360	75	□	Тип К
136		03/20	желтый		31±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	3	0,38±0,07	18	360	80	□	Тип К
137		03/25	красный	черный	31±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	3	0,38±0,07	30	360	120	□	Тип К
138		03/30	синий		31±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	3	0,38±0,07	45	360	150	□	Тип К
139		03/35	зеленый		31±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	3	0,38±0,07	65	360	190	□	Тип К
140		03/40	черный		31±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	3	0,38±0,07	100	360	250	□	Тип К
141		03/45	белый		31±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	3	0,38±0,07	120	360	360	□	Тип К
142		03/50	Желтый		31±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	3	0,38±0,07	170	360	450	□	Тип К
143		03/55	красный		31±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	3	0,38±0,07	195	360	550	□	Тип К
144		04/10	фиолетовый		21±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	4	0,38±0,07	6	360	25	□	Тип К
145		04/13	синий		21±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	4	0,38±0,07	7	360	30	□	Тип К
146		04/15	белый		21±0,02	1,0±0,5	0,150±0,02	4	0,38±0,07	8	360	50	□	Тип К
147		04/17	черный		21±0,02	1,0±0,5	0,170±0,02	4	0,38±0,07	9	360	65	□	Тип К
148		04/19	желтый		21±0,02	1,0±0,5	0,190±0,02	4	0,38±0,07	10	360	75	□	Тип К
149		04/20	желтый	белый	21±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	4	0,38±0,07	18	360	80	□	Тип К
150		04/25	красный		21±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	4	0,38±0,07	30	360	120	□	Тип К
151		04/30	синий		21±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	4	0,38±0,07	45	360	150	□	Тип К
152		04/35	зеленый		21±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	4	0,38±0,07	65	360	190	□	Тип К
153		04/40	черный		21±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	4	0,38±0,07	100	360	250	□	Тип К
154		04/45	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	4	0,38±0,07	120	360	360	□	Тип К

155		04/50	желтый		21±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	4	0,38±0,07	170	360	450	□	Тип К
156		04/55	красный		21±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	4	0,38±0,07	195	360	550	□	Тип К
157		04/10	фиолетовый		25±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	4	0,38±0,07	6	360	25	□	Тип К
158		04/13	синий		25±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	4	0,38±0,07	7	360	30	□	Тип К
159		04/15	белый		25±0,02	1,0±0,5	0,150±0,02	4	0,38±0,07	8	360	50	□	Тип К
160		04/17	черный		25±0,02	1,0±0,5	0,170±0,02	4	0,38±0,07	9	360	65	□	Тип К
161		04/19	желтый		25±0,02	1,0±0,5	0,190±0,02	4	0,38±0,07	10	360	75	□	Тип К
162		04/20	желтый		25±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	4	0,38±0,07	18	360	80	□	Тип К
163		04/25	красный	желтый	25±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	4	0,38±0,07	30	360	120	□	Тип К
164		04/30	синий		25±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	4	0,38±0,07	45	360	150	□	Тип К
165		04/35	зеленый		25±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	4	0,38±0,07	65	360	190	□	Тип К
166		04/40	черный		25±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	4	0,38±0,07	100	360	250	□	Тип К
167		04/45	белый		25±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	4	0,38±0,07	120	360	360	□	Тип К
168		04/50	желтый		25±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	4	0,38±0,07	170	360	450	□	Тип К
169		04/55	красный		25±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	4	0,38±0,07	195	360	550	□	Тип К
170		04/10	фиолетовый		28±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	4	0,38±0,07	6	360	25	□	Тип К
171		04/13	синий		28±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	4	0,38±0,07	7	360	30	□	Тип К
172		04/15	белый		28±0,02	1,0±0,5	0,150±0,02	4	0,38±0,07	8	360	50	□	Тип К
173		04/17	черный		28±0,02	1,0±0,5	0,170±0,02	4	0,38±0,07	9	360	65	□	Тип К
174		04/19	желтый		28±0,02	1,0±0,5	0,190±0,02	4	0,38±0,07	10	360	75	□	Тип К
175		04/20	желтый		28±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	4	0,38±0,07	18	360	80	□	Тип К
176		04/25	красный	красный	28±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	4	0,38±0,07	30	360	120	□	Тип К
177		04/30	синий		28±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	4	0,38±0,07	45	360	150	□	Тип К
178		04/35	зеленый		28±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	4	0,38±0,07	65	360	190	□	Тип К
179		04/40	черный		28±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	4	0,38±0,07	100	360	250	□	Тип К
180		04/45	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	4	0,38±0,07	120	360	360	□	Тип К
181		04/50	желтый		28±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	4	0,38±0,07	170	360	450	□	Тип К
182		04/55	красный		28±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	4	0,38±0,07	195	360	550	□	Тип К
183		04/10	фиолетовый	черный	31±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	4	0,38±0,07	6	360	25	□	Тип К
184		04/13	синий		31±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	4	0,38±0,07	7	360	30	□	Тип К

185		04/15	белый		31±0,02	1,0±0,5	0,150±0,02	4	0,38±0,07	8	360	50	□	Тип К
186		04/17	черный		31±0,02	1,0±0,5	0,170±0,02	4	0,38±0,07	9	360	65	□	Тип К
187		04/19	желтый		31±0,02	1,0±0,5	0,190±0,02	4	0,38±0,07	10	360	75	□	Тип К
188		04/20	желтый		31±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	4	0,38±0,07	18	360	80	□	Тип К
189		04/25	красный		31±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	4	0,38±0,07	30	360	120	□	Тип К
190		04/30	синий		31±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	4	0,38±0,07	45	360	150	□	Тип К
191		04/35	зеленый		31±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	4	0,38±0,07	65	360	190	□	Тип К
192		04/40	черный		31±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	4	0,38±0,07	100	360	250	□	Тип К
193		04/45	белый		31±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	4	0,38±0,07	120	360	360	□	Тип К
194		04/50	желтый		31±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	4	0,38±0,07	170	360	450	□	Тип К
195		04/55	красный		31±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	4	0,38±0,07	195	360	550	□	Тип К
196		05/10	фиолетовый		21±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	5	0,38±0,07	6	360	25	□	Тип К
197		05/13	синий		21±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	5	0,38±0,07	7	360	30	□	Тип К
198		05/15	белый		21±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	5	0,38±0,07	8	360	50	□	Тип К
199		05/17	черный		21±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	5	0,38±0,07	9	360	65	□	Тип К
200		05/19	желтый		21±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	5	0,38±0,07	10	360	75	□	Тип К
201		05/20	желтый		21±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	5	0,38±0,07	18	360	80	□	Тип К
202		05/25	красный	белый	21±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	5	0,38±0,07	30	360	120	□	Тип К
203		05/30	синий		21±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	5	0,38±0,07	45	360	150	□	Тип К
204		05/35	зеленый		21±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	5	0,38±0,07	65	360	190	□	Тип К
205		05/40	черный		21±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	5	0,38±0,07	100	360	250	□	Тип К
206		05/45	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	5	0,38±0,07	120	360	360	□	Тип К
207		05/50	желтый		21±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	5	0,38±0,07	170	360	450	□	Тип К
208		05/10	фиолетовый		25±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	5	0,38±0,07	6	360	25	□	Тип К
209		05/13	синий		25±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	5	0,38±0,07	7	360	30	□	Тип К
210		05/15	белый		25±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	5	0,38±0,07	8	360	50	□	Тип К
211		05/17	черный	желтый	25±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	5	0,38±0,07	9	360	65	□	Тип К
212		05/19	желтый		25±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	5	0,38±0,07	10	360	75	□	Тип К
213		05/20	желтый		25±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	5	0,38±0,07	18	360	80	□	Тип К
214		05/25	красный		25±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	5	0,38±0,07	30	360	120	□	Тип К

215		05/30	синий		25±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	5	0,38±0,07	45	360	150	□	Тип К
216		05/35	зеленый		25±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	5	0,38±0,07	65	360	190	□	Тип К
217		05/40	черный		25±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	5	0,38±0,07	100	360	250	□	Тип К
218		05/45	белый		25±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	5	0,38±0,07	120	360	360	□	Тип К
219		05/50	желтый		25±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	5	0,38±0,07	170	360	450	□	Тип К
220		05/10	фиолетовый		28±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	5	0,38±0,07	6	360	25	□	Тип К
221		05/13	синий		28±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	5	0,38±0,07	7	360	30	□	Тип К
222		05/15	белый		28±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	5	0,38±0,07	8	360	50	□	Тип К
223		05/17	черный		28±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	5	0,38±0,07	9	360	65	□	Тип К
224		05/19	желтый		28±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	5	0,38±0,07	10	360	75	□	Тип К
225		05/20	желтый		28±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	5	0,38±0,07	18	360	80	□	Тип К
226		05/25	красный	красный	28±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	5	0,38±0,07	30	360	120	□	Тип К
227		05/30	синий		28±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	5	0,38±0,07	45	360	150	□	Тип К
228		05/35	зеленый		28±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	5	0,38±0,07	65	360	190	□	Тип К
229		05/40	черный		28±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	5	0,38±0,07	100	360	250	□	Тип К
230		05/45	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	5	0,38±0,07	120	360	360	□	Тип К
231		05/50	желтый		28±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	5	0,38±0,07	170	360	450	□	Тип К
232		05/10	фиолетовый		31±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	5	0,38±0,07	6	360	25	□	Тип К
233		05/13	синий		31±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	5	0,38±0,07	7	360	30	□	Тип К
234		05/15	белый		31±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	5	0,38±0,07	8	360	50	□	Тип К
235		05/17	черный		31±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	5	0,38±0,07	9	360	65	□	Тип К
236		05/19	желтый		31±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	5	0,38±0,07	10	360	75	□	Тип К
237		05/20	желтый		31±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	5	0,38±0,07	18	360	80	□	Тип К
238		05/25	красный	черный	31±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	5	0,38±0,07	30	360	120	□	Тип К
239		05/30	синий		31±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	5	0,38±0,07	45	360	150	□	Тип К
240		05/35	зеленый		31±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	5	0,38±0,07	65	360	190	□	Тип К
241		05/40	черный		31±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	5	0,38±0,07	100	360	250	□	Тип К
242		05/45	белый		31±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	5	0,38±0,07	120	360	360	□	Тип К
243		05/50	желтый		31±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	5	0,38±0,07	170	360	450	□	Тип К
244		06/10	фиолетовый	белый	21±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	6	0,38±0,07	6	360	25	□	Тип К

245		06/15	белый		21±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	6	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
246		06/18	желтый		21±0,02	0,8±0,5	0,180±0,02	6	0,31±0,07	16	360	70	□	Тип К
247		06/20	желтый		21±0,02	0,8±0,5	0,200±0,02	6	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
248		06/25	красный		21±0,02	0,8±0,5	0,250±0,02	6	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
249		06/30	синий		21±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	6	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
250		06/35	зеленый		21±0,02	1,0±0,5	0,35±0,02	6	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
251		06/40	черный		21±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	6	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
252		06/45	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	6	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
253		06/50	желтый		21±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	6	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
254		06/55	красный		21±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	6	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
255		06/10	фиолетовый		25±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	6	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
256		06/15	белый		25±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	6	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
257		06/18	желтый		25±0,02	0,8±0,5	0,180±0,02	6	0,31±0,07	16	360	70	□	Тип К
258		06/20	желтый		25±0,02	0,8±0,5	0,200±0,02	6	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
259		06/25	красный		25±0,02	0,8±0,5	0,250±0,02	6	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
260		06/30	синий	желтый	25±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	6	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
261		06/35	зеленый		25±0,02	1,0±0,5	0,35±0,02	6	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
262		06/40	черный		25±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	6	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
263		06/45	белый		25±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	6	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
264		06/50	желтый		25±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	6	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
265		06/55	красный		25±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	6	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
266		06/10	фиолетовый		28±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	6	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
267		06/15	белый		28±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	6	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
268		06/18	желтый		28±0,02	0,8±0,5	0,180±0,02	6	0,31±0,07	16	360	70	□	Тип К
269		06/20	желтый		28±0,02	0,8±0,5	0,200±0,02	6	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
270		06/25	красный	красный	28±0,02	0,8±0,5	0,250±0,02	6	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
271		06/30	синий		28±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	6	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
272		06/35	зеленый		28±0,02	1,0±0,5	0,35±0,02	6	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
273		06/40	черный		28±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	6	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
274		06/45	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	6	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К

275		06/50	желтый		28±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	6	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
276		06/55	красный		28±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	6	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
277		06/10	фиолетовый		31±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	6	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
278		06/15	белый		31±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	6	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
279		06/18	желтый		31±0,02	0,8±0,5	0,180±0,02	6	0,31±0,07	16	360	70	□	Тип К
280		06/20	желтый		31±0,02	0,8±0,5	0,200±0,02	6	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
281		06/25	красный		31±0,02	0,8±0,5	0,250±0,02	6	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
282		06/30	синий	черный	31±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	6	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
283		06/35	зеленый		31±0,02	1,0±0,5	0,35±0,02	6	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
284		06/40	черный		31±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	6	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
285		06/45	белый		31±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	6	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
286		06/50	желтый		31±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	6	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
287		06/55	красный		31±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	6	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
288		08/10	фиолетовый		21±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	8	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
289		08/15	белый		21±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	8	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
290		08/20	желтый		21±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	8	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
291		08/25	красный		21±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	8	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
292		08/30	синий	белый	21±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	8	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
293		08/35	зеленый		21±0,02	1,0±0,5	0,350±0,02	8	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
294		08/40	черный		21±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	8	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
295		08/45	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	8	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
296		08/50	желтый		21±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	8	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
297		08/55	красный		21±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	8	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
298		08/10	фиолетовый		25±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	8	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
299		08/15	белый		25±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	8	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
230		08/20	желтый		25±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	8	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
231		08/25	красный	желтый	25±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	8	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
232		08/30	синий		25±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	8	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
233		08/35	зеленый		25±0,02	1,0±0,5	0,350±0,02	8	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
234		08/40	черный		25±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	8	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К

235		08/45	белый		25±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	8	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
336		08/50	желтый		25±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	8	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
337		08/55	красный		25±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	8	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
338		08/10	фиолетовый		28±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	8	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
339		08/15	белый		28±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	8	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
340		08/20	желтый		28±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	8	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
341		08/25	красный		28±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	8	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
342		08/30	синий		28±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	8	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
343		08/35	зеленый	красный	28±0,02	1,0±0,5	0,350±0,02	8	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
344		08/40	черный		28±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	8	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
345		08/45	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	8	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
346		08/50	желтый		28±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	8	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
347		08/55	красный		28±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	8	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
348		08/10	фиолетовый		31±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	8	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
349		08/15	белый		31±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	8	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
350		08/20	желтый		31±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	8	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
351		08/25	красный		31±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	8	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
352		08/30	синий		31±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	8	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
353		08/35	зеленый	черный	31±0,02	1,0±0,5	0,350±0,02	8	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
354		08/40	черный		31±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	8	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
355		08/45	белый		31±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	8	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
356		08/50	желтый		31±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	8	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
357		08/55	красный		31±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	8	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
358		10/10	фиолетовый		17±0,02	1,2±0,5	0,100±0,02	10	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
359		10/15	белый		17±0,02	1,2±0,5	0,150±0,02	10	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
360		10/20	желтый		17±0,02	1,2±0,5	0,200±0,02	10	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
361		10/25	красный	синий	17±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	10	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
362		10/30	синий		17±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	10	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
363		10/35	зеленый		17±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	10	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
364		10/40	черный		17±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	10	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К

365		10/45	белый		17±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	10	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
366		10/50	желтый		17±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	10	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
367		10/55	красный		17±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	10	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
368		10/60	синий		17±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	10	0,31±0,07	280	360	690	□	Тип К
369		10/10	фиолетовый		19±0,02	1,2±0,5	0,100±0,02	10	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
370		10/15	белый		19±0,02	1,2±0,5	0,150±0,02	10	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
371		10/20	желтый		19±0,02	1,2±0,5	0,200±0,02	10	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
372		10/25	красный		19±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	10	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
373		10/30	синий		19±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	10	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
374		10/35	зеленый	фиолето- вый	19±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	10	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
375		10/40	черный		19±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	10	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
376		10/45	белый		19±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	10	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
377		10/50	желтый		19±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	10	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
378		10/55	красный		19±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	10	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
379		10/60	синий		19±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	10	0,31±0,07	280	360	690	□	Тип К
380		10/10	фиолетовый		21±0,02	1,2±0,5	0,100±0,02	10	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
381		10/15	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,150±0,02	10	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
382		10/20	желтый		21±0,02	1,2±0,5	0,200±0,02	10	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
383		10/25	красный		21±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	10	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
384		10/30	синий		21±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	10	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
385		10/35	зеленый	белый	21±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	10	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
386		10/40	черный		21±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	10	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
387		10/45	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	10	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
388		10/50	желтый		21±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	10	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
389		10/55	красный		21±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	10	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
390		10/60	синий		21±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	10	0,31±0,07	280	360	690	□	Тип К
391		10/10	фиолетовый		28±0,02	1,2±0,5	0,100±0,02	10	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
392		10/15	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,150±0,02	10	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
393		10/20	желтый	красный	28±0,02	1,2±0,5	0,200±0,02	10	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
394		10/25	красный		28±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	10	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К

395		10/30	синий		28±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	10	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
396		10/35	зеленый		28±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	10	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
397		10/40	черный		28±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	10	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
398		10/45	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	10	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
399		10/50	желтый		28±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	10	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
400		10/55	красный		28±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	10	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
401		10/60	синий		28±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	10	0,31±0,07	280	360	690	□	Тип К
403		10/10	фиолетовый	черный	31±0,02	1,2±0,5	0,100±0,02	10	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
404		10/15	белый		31±0,02	1,2±0,5	0,150±0,02	10	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
405		10/20	желтый		31±0,02	1,2±0,5	0,200±0,02	10	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
406		10/25	красный		31±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	10	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
407		10/30	синий		31±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	10	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
408		10/35	зеленый		31±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	10	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
409		10/40	черный		31±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	10	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
410		10/45	белый		31±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	10	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
411		10/50	желтый		31±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	10	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
412		10/55	красный		31±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	10	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
413		10/60	синий		31±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	10	0,31±0,07	280	360	690	□	Тип К

9.3. S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы.

Каждый набор инструментов включает ротационные файлы с памятью формы. Каждый файл в разрезе имеет форму треугольника с выпуклыми гранями и состоит из хвостовика и оперативной части, которая изготовлена из специального никель-титанового сплава с памятью формы. На основании оперативной части расположен стоппер, который используется для обозначения рабочей длины файла. Штрих на стоппере идентифицирует оригинальное направление наконечника в корневом канале.

Безопасный в каналах со сложной анатомией. Набор инструментов используется при подключении к активному медицинскому оборудованию с реципрокной функцией (эндодонтический реципрокный наконечник, диаметр 2,35мм) и совершает вращательные движения в обоих направлениях по типу реципрок со скоростью 250-350 оборотов в минуту с целью расширения корневого канала. За счет реципрокного типа движения уменьшаются риски блокирования корневого канала.

Изделия из наборов являются многоразовыми и выдерживают до 10 использований.

Общий вид изделий, входящих в наборы, представлен на рисунке 3.


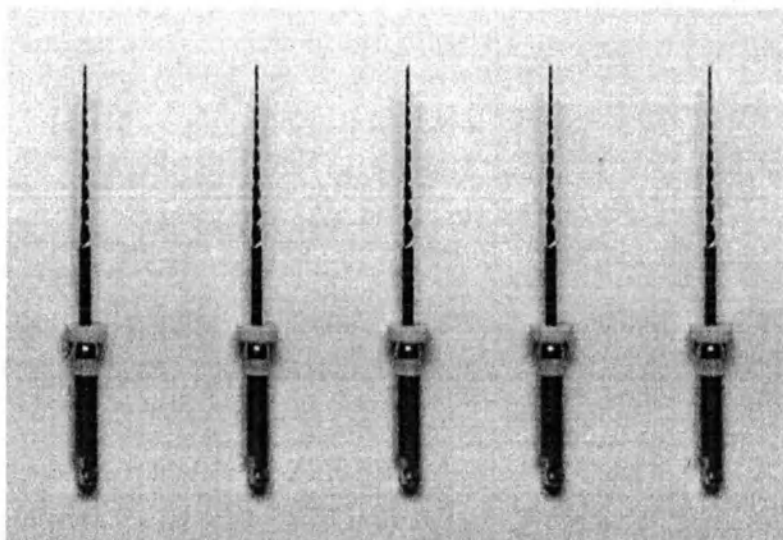


Рисунок 3. Общий вид изделий из наборов S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы

Габаритные характеристики изделий, входящих в наборы S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы, указаны в таблице 3, чертеже 3.


Масса изделий, входящих в наборы S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы, указана в таблице 3.

S3 Rotary Endo Files

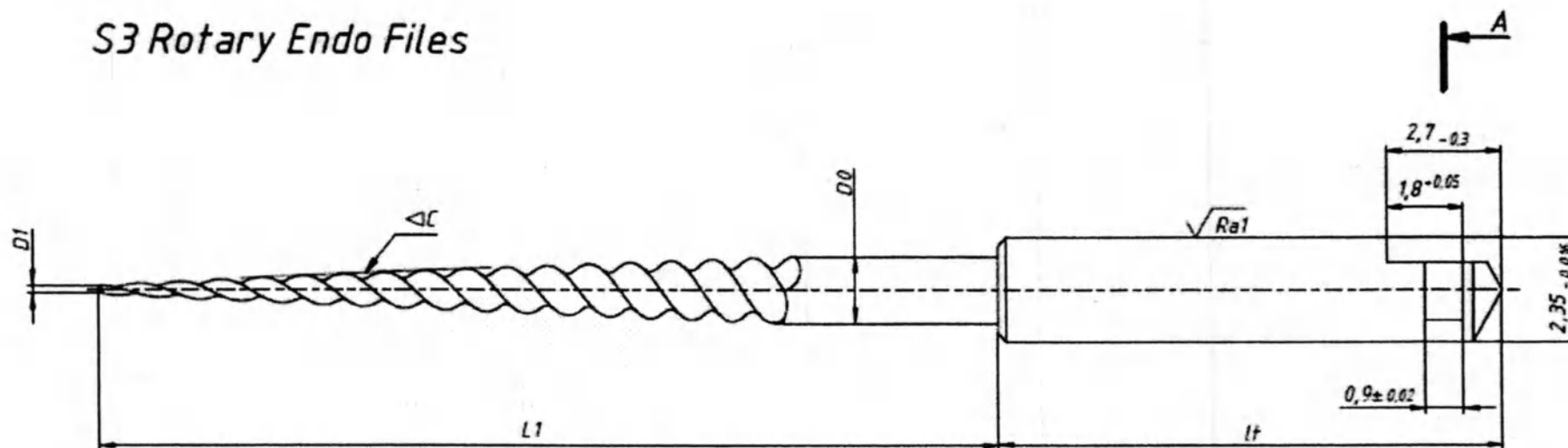

1. Твердость оперативная часть HRC35
2. Шероховатость оперативная часть $Ra0,8$
3. Габаритные характеристики изделий, входящих в наборы S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы, указаны в таблице 2

Обозначения на чертеже:
 Длина оперативной части $L1$
 Базовый диаметр $D0$
 Апикальное сужение $D1$
 Конусность C
 Длина хвостовика $It = 11, 13,2$ мм

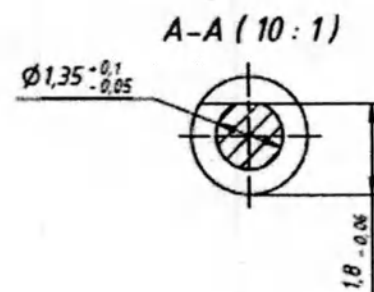

Чертеж 3. S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы.

Таблица 3. Габаритные характеристики и масса изделий, входящих в наборы S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы

№	Наименование	Размер	Цветовая кодировка хвостовика	Цвет стоппера	Длина рабочей части L1, мм.	Базовый диаметр рабочей части D0, мм.	Апикальное сужение D1, мм.	Конусность, С %, ±0,05	Масса, г.	Устойчивость к разрушению при скручивании и угловом отклонении		Изгибающий момент гс см, не более	Форма поперечного сечения	Тип инструмента
										Сопротивление разрушению (крутящий момент) гс см, мин.	Градусы углового отклонения (°), мин			
1	S3 Rotary Endo Files	02/10	фиолетовый	белый	21±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	2	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
2		02/13	синий		21±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	2	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
3		02/15	белый		21±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	2	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
4		02/17	черный		21±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	2	0,31±0,07	9	360	65	□	Тип К
5		02/19	желтый		21±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	2	0,31±0,07	10	360	75	□	Тип К
6		02/20	желтый		21±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	2	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
7		02/25	красный		21±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	2	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
8		02/30	синий		21±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	2	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
9		02/35	зеленый		21±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	2	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
10		02/40	черный		21±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	2	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
11		02/45	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	2	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
12		02/50	желтый		21±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	2	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
13		02/55	красный		21±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	2	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
14		02/60	синий		21±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	2	0,31±0,07	250	360	690	□	Тип К
15		02/65	зеленый		21±0,02	1,2±0,5	0,650±0,02	2	0,31±0,07	320	360	780	□	Тип К
16		02/70	черный		21±0,02	1,2±0,5	0,700±0,02	2	0,31±0,07	450	360	890	□	Тип К
17		02/10	фиолетовый	желтый	25±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	2	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
18		02/13	синий		25±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	2	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
19		02/15	белый		25±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	2	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
20		02/17	черный		25±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	2	0,31±0,07	9	360	65	□	Тип К
21		02/19	желтый		25±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	2	0,31±0,07	10	360	75	□	Тип К
22		02/20	желтый		25±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	2	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К

23		02/25	красный		25±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	2	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
24		02/30	синий		25±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	2	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
25		02/35	зеленый		25±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	2	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
26		02/40	черный		25±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	2	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
27		02/45	белый		25±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	2	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
28		02/50	желтый		25±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	2	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
29		02/55	красный		25±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	2	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
30		02/60	синий		25±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	2	0,31±0,07	250	360	690	□	Тип К
31		02/65	зеленый		25±0,02	1,2±0,5	0,650±0,02	2	0,31±0,07	320	360	780	□	Тип К
32		02/70	черный		25±0,02	1,2±0,5	0,700±0,02	2	0,31±0,07	450	360	890	□	Тип К
33		02/10	фиолетовый		28±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	2	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
34		02/13	синий		28±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	2	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
35		02/15	белый		28±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	2	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
36		02/17	черный		28±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	2	0,31±0,07	9	360	65	□	Тип К
37		02/19	желтый		28±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	2	0,31±0,07	10	360	75	□	Тип К
38		02/20	желтый		28±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	2	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
39		02/25	красный		28±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	2	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
40		02/30	синий		28±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	2	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
41		02/35	зеленый	красный	28±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	2	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
42		02/40	черный		28±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	2	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
43		02/45	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	2	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
44		02/50	желтый		28±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	2	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
45		02/55	красный		28±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	2	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
46		02/60	синий		28±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	2	0,31±0,07	250	360	690	□	Тип К
47		02/65	зеленый		28±0,02	1,2±0,5	0,650±0,02	2	0,31±0,07	320	360	780	□	Тип К
48		02/70	черный		28±0,02	1,2±0,5	0,700±0,02	2	0,31±0,07	450	360	890	□	Тип К
49		02/10	фиолетовый		31±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	2	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
50		02/13	синий	черный	31±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	2	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
51		02/15	белый		31±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	2	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К

52		02/17	черный		31±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	2	0,31±0,07	9	360	65	□	Тип К
53		02/19	желтый		31±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	2	0,31±0,07	10	360	75	□	Тип К
54		02/20	желтый		31±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	2	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
55		02/25	красный		31±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	2	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
56		02/30	синий		31±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	2	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
57		02/35	зеленый		31±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	2	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
58		02/40	черный		31±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	2	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
59		02/45	белый		31±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	2	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
60		02/50	желтый		31±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	2	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
61		02/55	красный		31±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	2	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
62		02/60	синий		31±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	2	0,31±0,07	250	360	690	□	Тип К
63		02/65	зеленый		31±0,02	1,2±0,5	0,650±0,02	2	0,31±0,07	320	360	780	□	Тип К
64		02/70	черный		31±0,02	1,2±0,5	0,700±0,02	2	0,31±0,07	450	360	890	□	Тип К
65		025/10	фиолето- вый		19±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	2,5	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
66		025/13	синий		19±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	2,5	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
67		025/15	белый	фиолето- вый	19±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	2,5	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
68		025/17	черный		19±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	2,5	0,31±0,07	9	360	65	□	Тип К
69		025/19	желтый		19±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	2,5	0,31±0,07	10	360	75	□	Тип К
70		025/20	желтый		19±0,02	0,8±0,5	0,200±0,02	2,5	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
71		025/10	фиолето- вый		21±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	2,5	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
72		025/13	синий		21±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	2,5	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
73		025/15	белый	белый	21±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	2,5	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
74		025/17	черный		21±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	2,5	0,31±0,07	9	360	65	□	Тип К
75		025/19	желтый		21±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	2,5	0,31±0,07	10	360	75	□	Тип К
76		025/20	желтый		21±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	2,5	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
77		025/10	фиолето- вый		25±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	2,5	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
78		025/13	синий		25±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	2,5	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
79		025/15	белый	желтый	25±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	2,5	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
80		025/17	черный		25±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	2,5	0,31±0,07	15	360	65	□	Тип К

81		025/19	желтый		25±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	2,5	0,31±0,07	17	360	75	□	Тип К
82		025/20	желтый		25±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	2,5	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
83		025/10	фиолетовый	красный	28±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	2,5	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
84		025/13	синий		28±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	2,5	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
85		025/15	белый		28±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	2,5	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
86		025/17	черный		28±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	2,5	0,31±0,07	15	360	65	□	Тип К
87		025/19	желтый		28±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	2,5	0,31±0,07	17	360	75	□	Тип К
88		025/20	желтый		28±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	2,5	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
89		025/10	фиолетовый	черный	31±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	2,5	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
90		025/13	синий		31±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	2,5	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
91		025/15	белый		31±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	2,5	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
92		025/17	черный		31±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	2,5	0,31±0,07	15	360	65	□	Тип К
93		025/19	желтый		31±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	2,5	0,31±0,07	17	360	75	□	Тип К
94		025/20	желтый		31±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	2,5	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
95		03/10	фиолетовый	фиолетовый	19±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	3	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
96		03/13	синий		19±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	3	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
97		03/15	белый		19±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	3	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
98		03/17	черный		19±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	3	0,31±0,07	15	360	65	□	Тип К
99		03/19	желтый		19±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	3	0,31±0,07	17	360	75	□	Тип К
100		03/20	желтый		19±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	3	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
101		03/25	красный		19±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	3	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
102		03/30	синий		19±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	3	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
103		03/35	зеленый		19±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	3	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
104		03/40	черный		19±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	3	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
105		03/45	белый		19±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	3	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
106		03/50	желтый		19±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	3	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
107		03/55	красный		19±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	3	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
108		03/10	фиолетовый	белый	21±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	3	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
109		03/13	синий		21±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	3	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К

110		03/15	белый		21±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	3	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
111		03/17	черный		21±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	3	0,31±0,07	15	360	65	□	Тип К
112		03/19	желтый		21±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	3	0,31±0,07	17	360	75	□	Тип К
113		03/20	желтый		21±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	3	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
114		03/25	красный		21±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	3	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
115		03/30	синий		21±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	3	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
116		03/35	зеленый		21±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	3	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
117		03/40	черный		21±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	3	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
118		03/45	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	3	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
119		03/50	желтый		21±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	3	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
120		03/55	красный		21±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	3	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
121		03/10	фиолето- вый		25±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	3	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
122		03/13	синий		25±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	3	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
123		03/15	белый		25±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	3	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
124		03/17	черный		25±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	3	0,31±0,07	15	360	65	□	Тип К
125		03/19	желтый		25±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	3	0,31±0,07	17	360	75	□	Тип К
126		03/20	желтый		25±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	3	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
127		03/25	красный	желтый	25±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	3	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
128		03/30	синий		25±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	3	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
129		03/35	зеленый		25±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	3	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
130		03/40	черный		25±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	3	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
131		03/45	белый		25±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	3	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
132		03/50	желтый		25±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	3	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
133		03/55	красный		25±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	3	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
134		03/10	фиолето- вый		28±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	3	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
135		03/13	синий		28±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	3	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
136		03/15	белый	красный	28±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	3	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
137		03/17	черный		28±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	3	0,31±0,07	15	360	65	□	Тип К
138		03/19	желтый		28±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	3	0,31±0,07	17	360	75	□	Тип К

139		03/20	желтый		28±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	3	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
140		03/25	красный		28±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	3	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
141		03/30	синий		28±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	3	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
142		03/35	зеленый		28±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	3	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
143		03/40	черный		28±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	3	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
144		03/45	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	3	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
145		03/50	желтый		28±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	3	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
146		03/55	красный		28±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	3	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
147		03/10	фиолето- вый		31±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	3	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
148		03/13	синий		31±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	3	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
149		03/15	белый		31±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	3	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
150		03/17	черный		31±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	3	0,31±0,07	15	360	65	□	Тип К
151		03/19	желтый		31±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	3	0,31±0,07	17	360	75	□	Тип К
152		03/20	желтый		31±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	3	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
153		03/25	красный	черный	31±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	3	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
154		03/30	синий		31±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	3	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
155		03/35	зеленый		31±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	3	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
156		03/40	черный		31±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	3	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
157		03/45	белый		31±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	3	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
158		03/50	желтый		31±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	3	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
159		03/55	красный		31±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	3	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
160		04/10	фиолето- вый		21±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	4	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
161		04/15	белый		21±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	4	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
162		04/20	желтый		21±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	4	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
163		04/25	красный		21±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	4	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
164		04/30	синий	белый	21±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	4	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
165		04/35	зеленый		21±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	4	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
166		04/40	чёрный		21±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	4	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
167		04/45	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	4	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К

168		04/50	жёлтый		21±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	4	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
169		04/55	красный		21±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	4	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
170		04/10	фиолето- вый		25±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	4	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
171		04/15	белый		25±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	4	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
172		04/20	желтый		25±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	4	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
173		04/25	красный		25±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	4	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
174		04/30	синий		25±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	4	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
175		04/35	зеленый	желтый	25±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	4	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
176		04/40	чёрный		25±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	4	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
177		04/45	белый		25±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	4	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
178		04/50	жёлтый		25±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	4	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
179		04/55	красный		25±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	4	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
180		04/10	фиолето- вый		28±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	4	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
181		04/15	белый		28±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	4	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
182		04/20	желтый		28±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	4	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
183		04/25	красный		28±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	4	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
184		04/30	синий		28±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	4	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
185		04/35	зеленый	красный	28±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	4	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
186		04/40	чёрный		28±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	4	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
187		04/45	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	4	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
188		04/50	жёлтый		28±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	4	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
189		04/55	красный		28±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	4	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
190		04/10	фиолето- вый		31±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	4	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
191		04/15	белый		31±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	4	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
192		04/20	желтый		31±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	4	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
193		04/25	красный	черный	31±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	4	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
194		04/30	синий		31±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	4	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
195		04/35	зеленый		31±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	4	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
196		04/40	чёрный		31±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	4	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К

197		04/45	белый		31±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	4	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
198		04/50	желтый		31±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	4	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
199		04/55	красный		31±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	4	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
200		05/10	фиолетовый		21±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	5	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
201		05/15	белый		21±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	5	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
202		05/20	желтый		21±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	5	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
203		05/25	красный		21±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	5	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
204		05/30	синий	белый	21±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	5	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
205		05/35	зеленый		21±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	5	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
206		05/40	черный		21±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	5	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
207		05/45	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	5	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
208		05/50	желтый		21±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	5	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
209		05/10	фиолетовый		25±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	5	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
210		05/15	белый		25±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	5	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
211		05/20	желтый		25±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	5	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
212		05/25	красный		25±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	5	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
213		05/30	синий	желтый	25±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	5	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
214		05/35	зеленый		25±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	5	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
215		05/40	черный		25±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	5	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
216		05/45	белый		25±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	5	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
217		05/50	желтый		25±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	5	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
218		05/10	фиолетовый		28±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	5	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
219		05/15	белый		28±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	5	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
220		05/20	желтый		28±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	5	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
221		05/25	красный		28±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	5	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
222		05/30	синий	красный	28±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	5	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
223		05/35	зеленый		28±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	5	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
224		05/40	черный		28±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	5	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
225		05/45	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	5	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К

226		05/50	желтый		28±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	5	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
227		05/10	фиолето- вый		31±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	5	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
228		05/15	белый		31±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	5	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
229		05/20	желтый		31±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	5	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
230		05/25	красный		31±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	5	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
231		05/30	синий	черный	31±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	5	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
232		05/35	зеленый		31±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	5	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
233		05/40	черный		31±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	5	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
234		05/45	белый		31±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	5	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
235		05/50	желтый		31±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	5	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
236		06/10	фиолето- вый		21±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	6	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
237		06/15	белый		21±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	6	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
238		06/18	желтый		21±0,02	1,0±0,5	0,180±0,02	6	0,31±0,07	16	360	60	□	Тип К
239		06/20	желтый		21±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	6	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
240		06/25	красный		21±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	6	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
241		06/30	синий	белый	21±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	6	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
242		06/35	зеленый		21±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	6	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
243		06/40	черный		21±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	6	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
244		06/45	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	6	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
245		06/50	желтый		21±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	8	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
246		06/10	фиолето- вый		25±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	6	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
247		06/15	белый		25±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	6	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
248		06/18	желтый		25±0,02	1,0±0,5	0,180±0,02	6	0,31±0,07	16	360	60	□	Тип К
249		06/20	желтый		25±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	6	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
250		06/25	красный	желтый	25±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	6	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
251		06/30	синий		25±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	6	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
252		06/35	зеленый		25±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	6	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
253		06/40	черный		25±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	6	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
254		06/45	белый		25±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	6	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К

255		06/50	желтый		25±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	6	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
256		06/10	фиолето- вый		28±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	6	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
257		06/15	белый		28±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	6	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
258		06/18	желтый		28±0,02	1,0±0,5	0,180±0,02	6	0,31±0,07	16	360	60	□	Тип К
259		06/20	желтый		28±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	6	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
260		06/25	красный		28±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	6	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
261		06/30	синий	красный	28±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	6	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
262		06/35	зеленый		28±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	6	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
263		06/40	черный		28±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	6	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
264		06/45	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	6	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
265		06/50	желтый		28±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	6	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
266		06/10	фиолето- вый		31±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	6	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
267		06/15	белый		31±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	6	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
268		06/18	желтый		31±0,02	1,0±0,5	0,180±0,02	6	0,31±0,07	16	360	60	□	Тип К
269		06/20	желтый		31±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	6	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
270		06/25	красный		31±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	6	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
271		06/30	синий	черный	31±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	6	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
272		06/35	зеленый		31±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	6	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
273		06/40	черный		31±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	6	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
274		06/45	белый		31±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	6	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
275		06/50	желтый		31±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	6	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
276		08/10	фиолето- вый		21±0,02	1,2±0,5	0,100±0,02	8	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
277		08/15	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,150±0,02	8	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
278		08/20	желтый		21±0,02	1,2±0,5	0,200±0,02	8	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
279		08/25	красный		21±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	8	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
280		08/30	синий	белый	21±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	8	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
281		08/35	зеленый		21±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	8	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
282		08/40	черный		21±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	8	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
283		08/45	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	8	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К

284		08/50	желтый		21±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	8	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
285		08/55	красный		21±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	8	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
286		08/10	фиолето- вый		25±0,02	1,2±0,5	0,100±0,02	8	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
287		08/15	белый		25±0,02	1,2±0,5	0,150±0,02	8	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
288		08/20	желтый		25±0,02	1,2±0,5	0,200±0,02	8	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
289		08/25	красный		25±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	8	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
290		08/30	синий		25±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	8	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
291		08/35	зеленый	желтый	25±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	8	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
292		08/40	черный		25±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	8	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
293		08/45	белый		25±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	8	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
294		08/50	желтый		25±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	8	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
295		08/55	красный		25±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	8	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
296		08/10	фиолето- вый		28±0,02	1,2±0,5	0,100±0,02	8	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
297		08/15	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,150±0,02	8	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
298		08/20	желтый		28±0,02	1,2±0,5	0,200±0,02	8	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
299		08/25	красный		28±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	8	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
300		08/30	синий		28±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	8	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
301		08/35	зеленый	красный	28±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	8	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
302		08/40	черный		28±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	8	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
303		08/45	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	8	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
304		08/50	желтый		28±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	8	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
305		08/55	красный		28±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	8	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
306		10/10	фиолето- вый		17±0,02	1,2±0,5	0,100±0,02	10	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
307		10/15	белый		17±0,02	1,2±0,5	0,150±0,02	10	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
308		10/20	бесцвет- ный		17±0,02	1,2±0,5	0,200±0,02	10	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
309		10/25	красный	желтый	17±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	10	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
310		10/30	синий		17±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	10	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
311		10/35	зеленый		17±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	10	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
312		10/40	черный		17±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	10	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К

313		10/45	белый		17±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	10	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
314		10/50	желтый		17±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	10	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
315		10/55	красный		17±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	10	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
316		10/60	Синий		17±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	10	0,31±0,07	250	360	690	□	Тип К
317		10/10	фиолето- вый		19±0,02	1,2±0,5	0,100±0,02	10	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
318		10/15	белый		19±0,02	1,2±0,5	0,150±0,02	10	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
319		10/20	желтый		19±0,02	1,2±0,5	0,200±0,02	10	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
320		10/25	красный		19±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	10	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
321		10/30	синий		19±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	10	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
322		10/35	зеленый	фиолето- вый	19±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	10	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
323		10/40	черный		19±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	10	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
324		10/45	белый		19±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	10	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
325		10/50	желтый		19±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	10	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
326		10/55	красный		19±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	10	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
327		10/60	Синий		19±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	10	0,31±0,07	250	360	690	□	Тип К
328		10/10	фиолето- вый		21±0,02	1,2±0,5	0,100±0,02	10	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
329		10/15	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,150±0,02	10	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
330		10/20	желтый		21±0,02	1,2±0,5	0,200±0,02	10	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
331		10/25	красный		21±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	10	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
332		10/30	синий		21±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	10	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
333		10/35	зеленый	белый	21±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	10	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
334		10/40	черный		21±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	10	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
335		10/45	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	10	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
336		10/50	желтый		21±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	10	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
337		10/55	красный		21±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	10	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
338		10/60	синий		21±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	10	0,31±0,07	250	360	690	□	Тип К
339		10/10	фиолето- вый		25±0,02	1,2±0,5	0,100±0,02	10	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
340		10/15	белый	желтый	25±0,02	1,2±0,5	0,150±0,02	10	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
341		10/20	желтый		25±0,02	1,2±0,5	0,200±0,02	10	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К

342		10/25	красный		25±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	10	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
343		10/30	синий		25±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	10	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
344		10/35	зеленый		25±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	10	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
345		10/40	черный		25±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	10	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
346		10/45	белый		25±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	10	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
347		10/50	желтый		25±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	10	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
348		10/55	красный		25±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	10	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
349		10/60	Синий		25±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	10	0,31±0,07	250	360	690	□	Тип К
350		10/10	фиолето- вый		28±0,02	1,2±0,5	0,100±0,02	10	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
351		10/15	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,150±0,02	10	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
352		10/20	желтый		28±0,02	1,2±0,5	0,200±0,02	10	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
353		10/25	красный		28±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	10	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
354		10/30	синий		28±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	10	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
355		10/35	зеленый	красный	28±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	10	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
356		10/40	черный		28±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	10	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
357		10/45	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	10	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
358		10/50	желтый		28±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	10	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
359		10/55	красный		28±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	10	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
360		10/60	синий		28±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	10	0,31±0,07	250	360	690	□	Тип К
361		10/10	фиолето- вый		31±0,02	1,2±0,5	0,100±0,02	10	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
362		10/15	белый		31±0,02	1,2±0,5	0,150±0,02	10	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
363		10/20	желтый		31±0,02	1,2±0,5	0,200±0,02	10	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
364		10/25	красный		31±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	10	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
365		10/30	синий		31±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	10	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
366		10/35	зеленый	черный	31±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	10	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
367		10/40	черный		31±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	10	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
368		10/45	белый		31±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	10	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
369		10/50	желтый		31±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	10	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
370		10/55	красный		31±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	10	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
371		10/60	синий		31±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	10	0,31±0,07	250	360	690	□	Тип К

9.4. G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы.

Каждый набор инструментов включает ротационные файлы из никель-титанового сплава в упаковке. Каждый файл состоит из хвостовика и оперативной части, которая изготовлена из специального никель-титанового сплава с памятью формы. На основании оперативной части расположен стоппер, который используется для обозначения рабочей длины файла. Штрих на стоппере идентифицирует оригинальное направление наконечника в корневом канале.

Набор инструментов используется при подключении к активному медицинскому оборудованию (эндодонтический вращающийся наконечник, угловой наконечник с понижающим числом оборотов, диаметр 2,35 мм) и совершает вращательные движения с рекомендованной скоростью 400 оборотов в минуту с целью расширения корневого канала. Высокоэффективны для удаления инфицированного дентина с поверхности корневых каналов за счет режущей грани.

Изделия из наборов являются многоразовыми и выдерживают до 10 использований.

Общий вид изделий, входящих в наборы, представлен на рисунке 4.


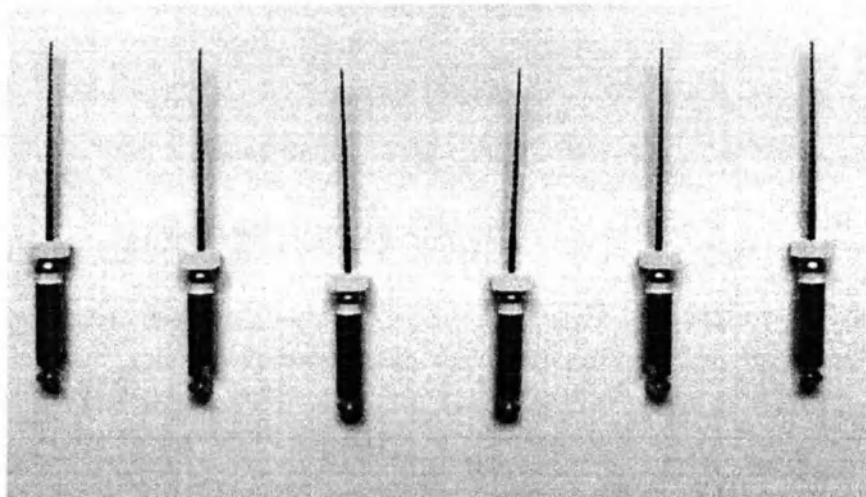


Рисунок 4. Общий вид изделий из наборов G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы.

Габаритные характеристики изделий, входящих в наборы G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, указаны в таблице 4, чертеже 4.

Масса изделий, входящих в наборы G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, указана в таблице 4.

G3 Rotary Endo Files

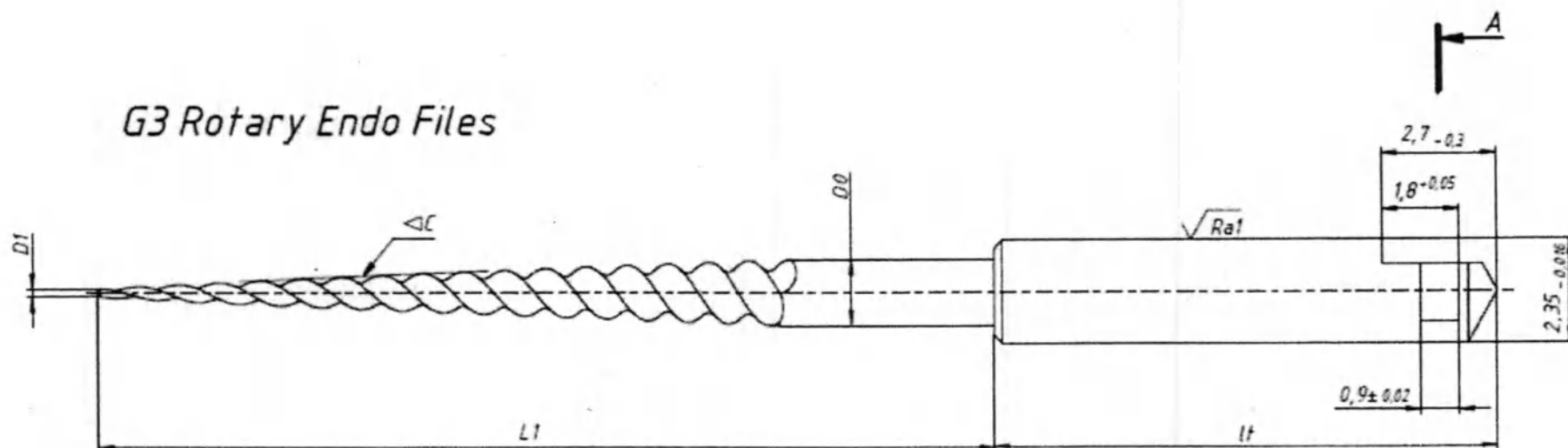

1. Твердость оперативная часть HRC35
2. Шероховатость оперативная часть Ra0,8
3. Габаритные характеристики изделий, входящих в наборы G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, указаны в таблице 4

Обозначения на чертеже:


Длина оперативной части $L1$

Базовый диаметр $D0$

Апикальное сужение $D1$

Конусность C

Длина хвостовика $lf = 11, 13, 2$ мм

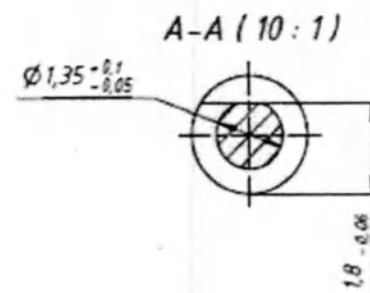

Чертеж 4. G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы.

Таблица 4. Габаритные характеристики и масса изделий из наборов G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы

№	Наименование	Размер	Цветовая кодировка хвостовика	Цвет столпера	Длина рабочей части L1, мм.	Базовый диаметр рабочей части D0, мм.	Апикальное сужение D1, мм.	Конусность, С %, ±0,05	Масса, г.	Устойчивость к разрушению при скручивании и угловом отклонении		Изгибающий момент гс см, не более	Форма поперечного сечения	Тип инструмента
										Сопротивление разрушению (крутящий момент) гс см, мин.	Градусы углового отклонения (°), мин			
1	G3 Rotary Endo Files	02/10	фиолетовый	белый	21±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	2	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
2		02/13	синий		21±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	2	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
3		02/15	белый		21±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	2	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
4		02/17	черный		21±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	2	0,31±0,07	15	360	65	□	Тип К
5		02/19	желтый		21±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	2	0,31±0,07	17	360	75	□	Тип К
6		02/20	желтый		21±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	2	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
7		02/25	красный		21±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	2	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
8		02/30	синий		21±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	2	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
9		02/35	зеленый		21±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	2	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
10		02/40	черный		21±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	2	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
11		02/45	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	2	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
12		02/50	желтый		21±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	2	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
13		02/55	красный		21±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	2	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
14		02/60	синий		21±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	2	0,31±0,07	250	360	690	□	Тип К
15		02/65	зеленый		21±0,02	1,2±0,5	0,650±0,02	2	0,31±0,07	320	360	780	□	Тип К
16		02/70	черный		21±0,02	1,2±0,5	0,700±0,02	2	0,31±0,07	450	360	890	□	Тип К
17		02/10	фиолетовый	желтый	25±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	2	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
18		02/13	синий		25±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	2	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
19		02/15	белый		25±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	2	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К

20		02/17	черный		25±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	2	0,31±0,07	15	360	65	□	Тип К
21		02/19	желтый		25±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	2	0,31±0,07	17	360	75	□	Тип К
22		02/20	желтый		25±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	2	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
23		02/25	красный		25±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	2	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
24		02/30	синий		25±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	2	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
25		02/35	зеленый		25±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	2	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
26		02/40	черный		25±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	2	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
27		02/45	белый		25±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	2	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
28		02/50	желтый		25±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	2	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
29		02/55	красный		25±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	2	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
30		02/60	синий		25±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	2	0,31±0,07	250	360	690	□	Тип К
31		02/65	зеленый		25±0,02	1,2±0,5	0,650±0,02	2	0,31±0,07	320	360	780	□	Тип К
32		02/70	черный		25±0,02	1,2±0,5	0,700±0,02	2	0,31±0,07	450	360	890	□	Тип К
33		02/10	фиолетовый		28±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	2	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
34		02/13	синий		28±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	2	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
35		02/15	белый		28±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	2	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
36		02/17	черный		28±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	2	0,31±0,07	15	360	65	□	Тип К
37		02/19	желтый		28±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	2	0,31±0,07	17	360	75	□	Тип К
38		02/20	желтый		28±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	2	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
39		02/25	красный		28±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	2	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
40		02/30	синий	красный	28±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	2	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
41		02/35	зеленый		28±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	2	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
42		02/40	черный		28±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	2	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
43		02/45	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	2	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
44		02/50	желтый		28±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	2	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
45		02/55	красный		28±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	2	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
46		02/60	синий		28±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	2	0,31±0,07	250	360	690	□	Тип К
47		02/65	зеленый		28±0,02	1,2±0,5	0,650±0,02	2	0,31±0,07	320	360	780	□	Тип К

48		02/70	черный		28±0,02	1,2±0,5	0,700±0,02	2	0,31±0,07	450	360	890	□	Тип К
49		02/10	фиолето- вый		31±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	2	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
50		02/13	синий		31±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	2	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
51		02/15	белый		31±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	2	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
52		02/17	черный		31±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	2	0,31±0,07	15	360	65	□	Тип К
53		02/19	желтый		31±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	2	0,31±0,07	17	360	75	□	Тип К
54		02/20	желтый		31±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	2	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
55		02/25	красный		31±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	2	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
56		02/30	синий		31±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	2	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
57		02/35	зеленый	черный	31±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	2	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
58		02/40	черный		31±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	2	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
59		02/45	белый		31±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	2	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
60		02/50	желтый		31±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	2	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
61		02/55	красный		31±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	2	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
62		02/60	синий		31±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	2	0,31±0,07	250	360	690	□	Тип К
63		02/65	зеленый		31±0,02	1,2±0,5	0,650±0,02	2	0,31±0,07	320	360	780	□	Тип К
64		02/70	черный		31±0,02	1,2±0,5	0,700±0,02	2	0,31±0,07	450	360	890	□	Тип К
65		025/10	фиолето- вый		19±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	2,5	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
66		025/13	синий		19±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	2,5	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
67		025/15	белый	фиолето- вый	19±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	2,5	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
68		025/17	черный		19±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	2,5	0,31±0,07	15	360	65	□	Тип К
69		025/19	желтый		19±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	2,5	0,31±0,07	17	360	75	□	Тип К
70		025/20	желтый		19±0,02	0,8±0,5	0,200±0,02	2,5	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
71		025/10	фиолето- вый		21±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	2,5	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
72		025/13	синий	белый	21±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	2,5	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
73		025/15	белый		21±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	2,5	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
74		025/17	черный		21±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	2,5	0,31±0,07	15	360	65	□	Тип К

75		025/19	желтый		21±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	2,5	0,31±0,07	17	360	75	□	Тип К
76		025/20	желтый		21±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	2,5	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
77		025/10	фиолетовый		25±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	2,5	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
78		025/13	синий		25±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	2,5	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
79		025/15	белый		25±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	2,5	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
80		025/17	черный		25±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	2,5	0,31±0,07	15	360	65	□	Тип К
81		025/19	желтый		25±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	2,5	0,31±0,07	17	360	75	□	Тип К
82		025/20	желтый		25±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	2,5	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
83		025/10	фиолетовый		28±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	2,5	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
84		025/13	синий		28±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	2,5	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
85		025/15	белый		28±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	2,5	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
86		025/17	черный		28±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	2,5	0,31±0,07	15	360	65	□	Тип К
87		025/19	желтый		28±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	2,5	0,31±0,07	17	360	75	□	Тип К
88		025/20	желтый		28±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	2,5	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
89		025/10	фиолетовый		31±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	2,5	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
90		025/13	синий		31±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	2,5	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
91		025/15	белый		31±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	2,5	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
92		025/17	черный		31±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	2,5	0,31±0,07	15	360	65	□	Тип К
93		025/19	желтый		31±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	2,5	0,31±0,07	17	360	75	□	Тип К
94		025/20	желтый		31±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	2,5	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
95		03/10	фиолетовый		19±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	3	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
96		03/13	синий		19±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	3	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
97		03/15	белый		19±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	3	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
98		03/17	черный		19±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	3	0,31±0,07	15	360	65	□	Тип К
99		03/19	желтый		19±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	3	0,31±0,07	17	360	75	□	Тип К
100		03/20	желтый		19±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	3	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
101		03/25	красный		19±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	3	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К

102		03/30	синий		19±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	3	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
103		03/35	зеленый		19±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	3	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
104		03/40	черный		19±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	3	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
105		03/45	белый		19±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	3	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
106		03/50	желтый		19±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	3	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
107		03/55	красный		19±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	3	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
108		03/10	фиолето- вый		21±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	3	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
109		03/13	синий		21±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	3	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
110		03/15	белый		21±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	3	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
111		03/17	черный		21±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	3	0,31±0,07	15	360	65	□	Тип К
112		03/19	желтый		21±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	3	0,31±0,07	17	360	75	□	Тип К
113		03/20	желтый		21±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	3	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
114		03/25	красный	белый	21±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	3	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
115		03/30	синий		21±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	3	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
116		03/35	зеленый		21±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	3	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
117		03/40	черный		21±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	3	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
118		03/45	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	3	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
119		03/50	желтый		21±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	3	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
120		03/55	красный		21±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	3	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
121		03/10	фиолето- вый		25±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	3	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
122		03/13	синий		25±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	3	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
123		03/15	белый		25±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	3	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
124		03/17	черный		25±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	3	0,31±0,07	15	360	65	□	Тип К
125		03/19	желтый	желтый	25±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	3	0,31±0,07	17	360	75	□	Тип К
126		03/20	желтый		25±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	3	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
127		03/25	красный		25±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	3	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
128		03/30	синий		25±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	3	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
129		03/35	зеленый		25±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	3	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К

130		03/40	черный		25±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	3	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
131		03/45	белый		25±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	3	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
132		03/50	желтый		25±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	3	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
133		03/55	красный		25±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	3	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
134		03/10	фиолетовый		28±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	3	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
135		03/13	синий		28±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	3	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
136		03/15	белый		28±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	3	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
137		03/17	черный		28±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	3	0,31±0,07	15	360	65	□	Тип К
138		03/19	желтый		28±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	3	0,31±0,07	17	360	75	□	Тип К
139		03/20	желтый		28±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	3	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
140		03/25	красный	красный	28±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	3	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
141		03/30	синий		28±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	3	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
142		03/35	зеленый		28±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	3	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
143		03/40	черный		28±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	3	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
144		03/45	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	3	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
145		03/50	желтый		28±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	3	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
146		03/55	красный		28±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	3	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
147		03/10	фиолетовый		31±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	3	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
148		03/13	синий		31±0,02	0,8±0,5	0,130±0,02	3	0,31±0,07	7	360	30	□	Тип К
149		03/15	белый		31±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	3	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
150		03/17	черный		31±0,02	0,8±0,5	0,170±0,02	3	0,31±0,07	15	360	65	□	Тип К
151		03/19	желтый		31±0,02	0,8±0,5	0,190±0,02	3	0,31±0,07	17	360	75	□	Тип К
152		03/20	желтый	черный	31±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	3	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
153		03/25	красный		31±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	3	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
154		03/30	синий		31±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	3	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
155		03/35	зеленый		31±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	3	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
156		03/40	черный		31±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	3	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
157		03/45	белый		31±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	3	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К

158		03/50	желтый		31±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	3	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
159		03/55	красный		31±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	3	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
160		04/10	фиолето- вый		21±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	4	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
161		04/15	белый		21±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	4	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
162		04/20	желтый		21±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	4	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
163		04/25	красный		21±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	4	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
164		04/30	синий		21±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	4	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
165		04/35	зеленый		21±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	4	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
166		04/40	чёрный		21±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	4	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
167		04/45	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	4	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
168		04/50	жёлтый		21±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	4	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
169		04/55	красный		21±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	4	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
170		04/10	фиолето- вый		25±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	4	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
171		04/15	белый		25±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	4	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
172		04/20	желтый		25±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	4	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
173		04/25	красный		25±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	4	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
174		04/30	синий		25±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	4	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
175		04/35	зеленый		25±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	4	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
176		04/40	чёрный		25±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	4	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
177		04/45	белый		25±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	4	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
178		04/50	жёлтый		25±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	4	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
179		04/55	красный		25±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	4	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
180		04/10	фиолето- вый		28±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	4	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
181		04/15	белый		28±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	4	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
182		04/20	желтый		28±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	4	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
183		04/25	красный		28±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	4	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
184		04/30	синий		28±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	4	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К

185		04/35	зеленый		28±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	4	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
186		04/40	чёрный		28±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	4	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
187		04/45	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	4	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
188		04/50	жёлтый		28±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	4	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
189		04/55	красный		28±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	4	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
190		04/10	фиолетовый		31±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	4	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
191		04/15	белый		31±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	4	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
192		04/20	желтый		31±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	4	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
193		04/25	красный		31±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	4	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
194		04/30	синий		31±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	4	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
195		04/35	зеленый	черный	31±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	4	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
196		04/40	чёрный		31±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	4	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
197		04/45	белый		31±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	4	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
198		04/50	жёлтый		31±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	4	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
199		04/55	красный		31±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	4	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
200		05/10	фиолетовый		21±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	5	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
201		05/15	белый		21±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	5	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
202		05/20	желтый		21±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	5	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
203		05/25	красный		21±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	5	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
204		05/30	синий	белый	21±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	5	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
205		05/35	зеленый		21±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	5	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
206		05/40	черный		21±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	5	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
207		05/45	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	5	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
208		05/50	желтый		21±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	5	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
209		05/10	фиолетовый		25±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	5	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
210		05/15	белый	желтый	25±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	5	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
211		05/20	желтый		25±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	5	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К

212		05/25	красный		25±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	5	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
213		05/30	синий		25±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	5	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
214		05/35	зеленый		25±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	5	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
215		05/40	черный		25±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	5	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
216		05/45	белый		25±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	5	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
217		05/50	желтый		25±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	5	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
218		05/10	фиолето- вый		28±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	5	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
219		05/15	белый		28±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	5	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
220		05/20	желтый		28±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	5	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
221		05/25	красный		28±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	5	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
222		05/30	синий	крас- ный	28±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	5	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
223		05/35	зеленый		28±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	5	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
224		05/40	черный		28±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	5	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
225		05/45	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	5	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
226		05/50	желтый		28±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	5	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
227		05/10	фиолето- вый		31±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	5	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
228		05/15	белый		31±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	5	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
229		05/20	желтый		31±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	5	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
230		05/25	красный		31±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	5	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
231		05/30	синий	черный	31±0,02	1,0±0,5	0,300±0,02	5	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
232		05/35	зеленый		31±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	5	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
233		05/40	черный		31±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	5	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
234		05/45	белый		31±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	5	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
235		05/50	желтый		31±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	5	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
236		06/10	фиолето- вый		21±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	6	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
237		06/15	белый	белый	21±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	6	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
238		06/18	желтый		21±0,02	1,0±0,5	0,180±0,02	6	0,31±0,07	16	360	70	□	Тип К

239		06/20	желтый		21±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	6	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
240		06/25	красный		21±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	6	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
241		06/30	синий		21±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	6	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
242		06/35	зеленый		21±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	6	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
243		06/40	черный		21±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	6	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
244		06/45	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	6	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
245		06/50	желтый		21±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	8	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
246		06/10	фиолетовый		25±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	6	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
247		06/15	белый		25±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	6	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
248		06/18	желтый		25±0,02	1,0±0,5	0,180±0,02	6	0,31±0,07	16	360	70	□	Тип К
249		06/20	желтый		25±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	6	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
250		06/25	красный	желтый	25±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	6	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
251		06/30	синий		25±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	6	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
252		06/35	зеленый		25±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	6	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
253		06/40	черный		25±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	6	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
254		06/45	белый		25±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	6	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
255		06/50	желтый		25±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	6	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
256		06/10	фиолетовый		28±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	6	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
257		06/15	белый		28±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	6	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
258		06/18	желтый		28±0,02	1,0±0,5	0,180±0,02	6	0,31±0,07	16	360	70	□	Тип К
259		06/20	желтый		28±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	6	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
260		06/25	красный	красный	28±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	6	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
261		06/30	синий		28±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	6	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
262		06/35	зеленый		28±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	6	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
263		06/40	черный		28±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	6	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
264		06/45	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	6	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
265		06/50	желтый		28±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	6	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К

266		06/10	фиолетовый	черный	31±0,02	0,8±0,5	0,100±0,02	6	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
267		06/15	белый		31±0,02	0,8±0,5	0,150±0,02	6	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
268		06/18	желтый		31±0,02	1,0±0,5	0,180±0,02	6	0,31±0,07	16	360	70	□	Тип К
269		06/20	желтый		31±0,02	1,0±0,5	0,200±0,02	6	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
270		06/25	красный		31±0,02	1,0±0,5	0,250±0,02	6	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
271		06/30	синий		31±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	6	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
272		06/35	зеленый		31±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	6	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
273		06/40	черный		31±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	6	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
274		06/45	белый		31±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	6	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
275		06/50	желтый		31±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	6	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
276		08/10	фиолетовый	белый	21±0,02	1,2±0,5	0,100±0,02	8	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
277		08/15	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,150±0,02	8	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
278		08/20	желтый		21±0,02	1,2±0,5	0,200±0,02	8	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
279		08/25	красный		21±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	8	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
280		08/30	синий		21±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	8	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
281		08/35	зеленый		21±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	8	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
282		08/40	черный		21±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	8	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
283		08/45	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	8	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
284		08/50	желтый		21±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	8	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
285		08/55	красный		21±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	8	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
286		08/10	фиолетовый	желтый	25±0,02	1,2±0,5	0,100±0,02	8	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
287		08/15	белый		25±0,02	1,2±0,5	0,150±0,02	8	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
288		08/20	желтый		25±0,02	1,2±0,5	0,200±0,02	8	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
289		08/25	красный		25±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	8	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
290		08/30	синий		25±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	8	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
291		08/35	зеленый		25±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	8	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
292		08/40	черный		25±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	8	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
293		08/45	белый		25±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	8	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К

294		08/50	желтый		25±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	8	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
295		08/55	красный		25±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	8	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
296		08/10	фиолето- вый		28±0,02	1,2±0,5	0,100±0,02	8	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
297		08/15	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,150±0,02	8	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
298		08/20	желтый		28±0,02	1,2±0,5	0,200±0,02	8	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
299		08/25	красный		28±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	8	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
300		08/30	синий		28±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	8	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
301		08/35	зеленый		28±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	8	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
302		08/40	черный		28±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	8	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
303		08/45	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	8	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
304		08/50	желтый		28±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	8	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
305		08/55	красный		28±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	8	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
306		10/10	фиолето- вый		17±0,02	1,2±0,5	0,100±0,02	10	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
307		10/15	белый		17±0,02	1,2±0,5	0,150±0,02	10	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
308		10/20	бесцветный		17±0,02	1,2±0,5	0,200±0,02	10	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
309		10/25	красный		17±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	10	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
310		10/30	синий		17±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	10	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
311		10/35	зеленый		17±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	10	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
312		10/40	черный		17±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	10	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
313		10/45	белый		17±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	10	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
314		10/50	желтый		17±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	10	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
315		10/55	красный		17±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	10	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
316		10/60	Синий		17±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	10	0,31±0,07	250	360	690	□	Тип К
317		10/10	фиолето- вый		19±0,02	1,2±0,5	0,100±0,02	10	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
318		10/15	белый		19±0,02	1,2±0,5	0,150±0,02	10	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
319		10/20	желтый		19±0,02	1,2±0,5	0,200±0,02	10	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
320		10/25	красный		19±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	10	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К

321		10/30	синий		19±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	10	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
322		10/35	зеленый		19±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	10	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
323		10/40	черный		19±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	10	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
324		10/45	белый		19±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	10	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
325		10/50	желтый		19±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	10	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
326		10/55	красный		19±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	10	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
327		10/60	Синий		19±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	10	0,31±0,07	250	360	690	□	Тип К
328		10/10	фиолето- вый		21±0,02	1,2±0,5	0,100±0,02	10	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
329		10/15	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,150±0,02	10	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
330		10/20	желтый		21±0,02	1,2±0,5	0,200±0,02	10	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
331		10/25	красный		21±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	10	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
332		10/30	синий		21±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	10	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
333		10/35	зеленый	белый	21±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	10	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
334		10/40	черный		21±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	10	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
335		10/45	белый		21±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	10	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
336		10/50	желтый		21±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	10	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
337		10/55	красный		21±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	10	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
338		10/60	синий		21±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	10	0,31±0,07	250	360	690	□	Тип К
339		10/10	фиолето- вый		25±0,02	1,2±0,5	0,100±0,02	10	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
340		10/15	белый		25±0,02	1,2±0,5	0,150±0,02	10	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
341		10/20	желтый		25±0,02	1,2±0,5	0,200±0,02	10	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
342		10/25	красный		25±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	10	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
343		10/30	синий		25±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	10	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
344		10/35	зеленый	желтый	25±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	10	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
345		10/40	черный		25±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	10	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
346		10/45	белый		25±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	10	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
347		10/50	желтый		25±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	10	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
348		10/55	красный		25±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	10	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К

349		10/60	Синий		25±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	10	0,31±0,07	250	360	690	□	Тип К
350		10/10	фиолетовый		28±0,02	1,2±0,5	0,100±0,02	10	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
351		10/15	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,150±0,02	10	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
352		10/20	желтый		28±0,02	1,2±0,5	0,200±0,02	10	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
353		10/25	красный		28±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	10	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
354		10/30	синий		28±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	10	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
355		10/35	зеленый		28±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	10	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
356		10/40	черный		28±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	10	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
357		10/45	белый		28±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	10	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
358		10/50	желтый		28±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	10	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
359		10/55	красный		28±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	10	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
360		10/60	синий		28±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	10	0,31±0,07	250	360	690	□	Тип К
361		10/10	фиолетовый		31±0,02	1,2±0,5	0,100±0,02	10	0,31±0,07	6	360	25	□	Тип К
362		10/15	белый		31±0,02	1,2±0,5	0,150±0,02	10	0,31±0,07	8	360	50	□	Тип К
363		10/20	желтый		31±0,02	1,2±0,5	0,200±0,02	10	0,31±0,07	18	360	80	□	Тип К
364		10/25	красный		31±0,02	1,2±0,5	0,250±0,02	10	0,31±0,07	30	360	120	□	Тип К
365		10/30	синий		31±0,02	1,2±0,5	0,300±0,02	10	0,31±0,07	45	360	150	□	Тип К
366		10/35	зеленый		31±0,02	1,2±0,5	0,350±0,02	10	0,31±0,07	65	360	190	□	Тип К
367		10/40	черный		31±0,02	1,2±0,5	0,400±0,02	10	0,31±0,07	100	360	250	□	Тип К
368		10/45	белый		31±0,02	1,2±0,5	0,450±0,02	10	0,31±0,07	120	360	360	□	Тип К
369		10/50	желтый		31±0,02	1,2±0,5	0,500±0,02	10	0,31±0,07	170	360	450	□	Тип К
370		10/55	красный		31±0,02	1,2±0,5	0,550±0,02	10	0,31±0,07	195	360	550	□	Тип К
371		10/60	синий		31±0,02	1,2±0,5	0,600±0,02	10	0,31±0,07	250	360	690	□	Тип К

9.5. SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы.

Каждый набор инструментов включает ротационные файлы. Каждый файл состоит из хвостовика и оперативной части, которая изготовлена из специального никель-титанового сплава. На основании режущей части расположен стоппер, который используется для обозначения рабочей длины файла. Штрих на стоппере идентифицирует оригинальное направление наконечника в корневом канале.

Набор ротационных инструментов используется при подключении к активному медицинскому оборудованию (эндодонтический вращающийся наконечник, угловой наконечник с понижающим числом оборотов, диаметр 2,35 мм) и совершает вращательные движения с рекомендованной скоростью 400 оборотов в минуту с целью расширения корневого канала.

Изделия высокоэффективны для удаления инфицированного дентина с поверхности корневых каналов за счет режущей грани.

Изделия из наборов являются многоразовыми и выдерживают до 10 использований.

Общий вид изделий, входящих в наборы, представлен на рисунке 5.


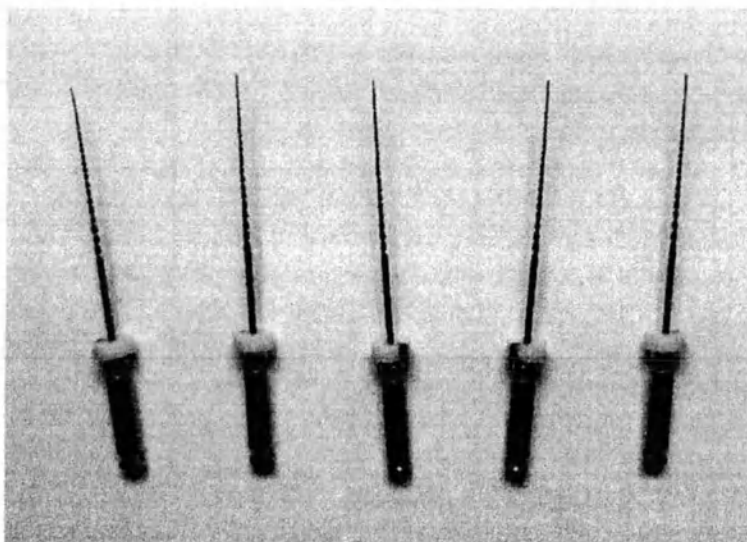


Рисунок 5. Общий вид изделий из наборов SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы



Габаритные характеристики изделий, входящих в наборы SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, указаны в таблице 5, чертеже 5.

SUPER PASS Rotary Endo Files

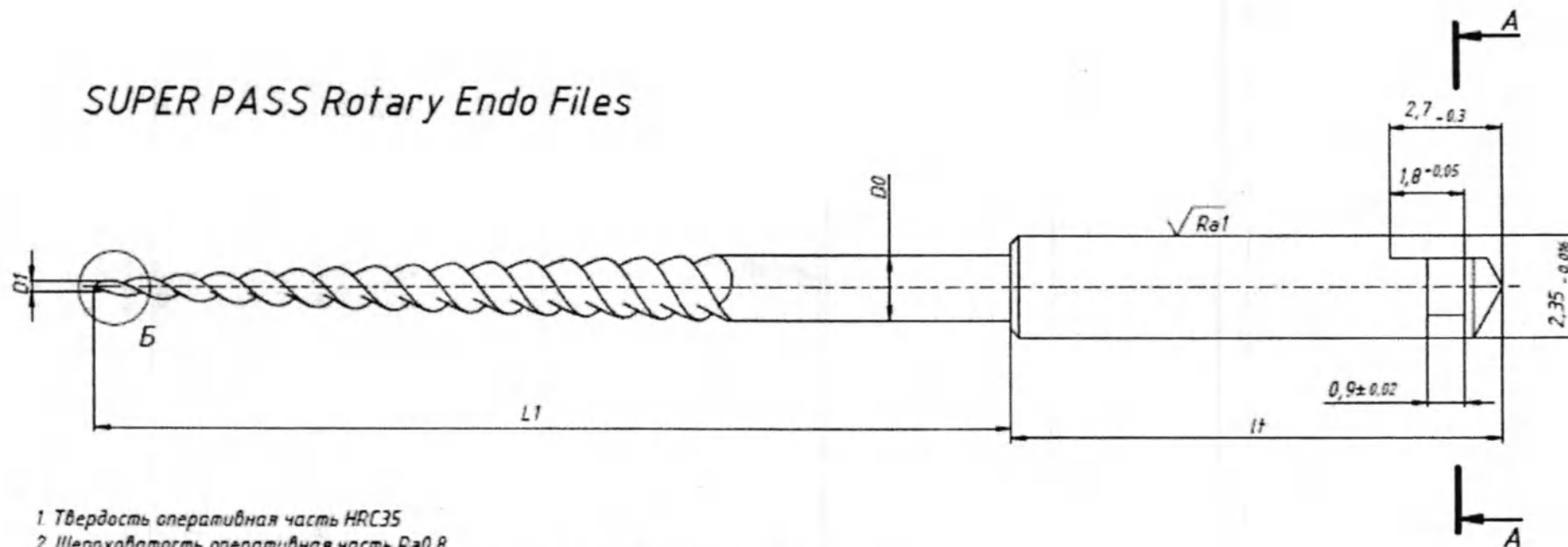

1. Твердость оперативная часть HRC35
2. Шероховатость оперативная часть Ra0.8
3. Габаритные характеристики изделий, входящих в наборы SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, указаны в таблице 5

Обозначения на чертеже:
 Длина оперативной части L1
 Базовый диаметр D0
 Апикальное сужение D1
 Конусность C
 Длина хвостовика lt = 11.13,2 мм

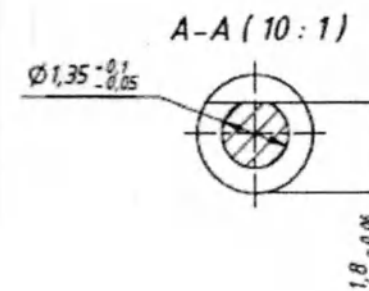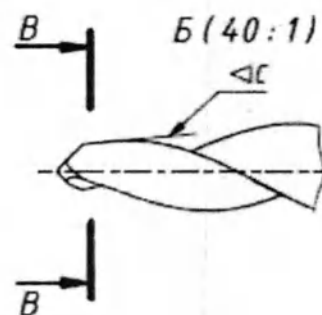

Чертеж 5. SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы

Таблица 5. Габаритные характеристики и масса ротационных фалов, входящих в наборы SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы.

№	Наименование	Размер	Цветовая кодировка хвостовика	Цвет стопера	Длина рабочей части L1, мм.	Базовый диаметр рабочей части D0, мм.	Апикальное сужение D1, мм, $\pm 0,02$	Конусность, С %, $\pm 0,05$	Масса, г.	Устойчивость к разрушению при скручивании и угловом отклонении		Изгибающий момент гс см, не более	Форма поперечного сечения	Тип инструмента
										Сопротивление разрушению (крутящий момент) гс см, мин.	Градусы углового отклонения (°), мин			
1	SUPER PASS Rotary Endo Files	02/20	желтый	белый	21 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,200	2	0,31 $\pm$ 0,07	18	360	80	□	Тип К
2		02/25	красный		21 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,250	2	0,31 $\pm$ 0,07	30	360	120	□	Тип К
3		025/13	фиолетовый		21 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,130	2,5	0,31 $\pm$ 0,07	7	360	30	□	Тип К
4		025/17	белый		21 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,170	2,5	0,31 $\pm$ 0,07	15	360	65	□	Тип К
5		02/20	желтый	желтый	25 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,200	2	0,31 $\pm$ 0,07	18	360	80	□	Тип К
6		02/25	красный		25 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,250	2	0,31 $\pm$ 0,07	30	360	120	□	Тип К
7		025/13	фиолетовый		25 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,130	2,5	0,31 $\pm$ 0,07	7	360	30	□	Тип К
8		025/17	белый		25 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,170	2,5	0,31 $\pm$ 0,07	15	360	65	□	Тип К
9		02/20	желтый	красный	28 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,200	2	0,31 $\pm$ 0,07	18	360	80	□	Тип К
10		02/25	красный		28 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,250	2	0,31 $\pm$ 0,07	30	360	120	□	Тип К
11		025/13	фиолетовый		28 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,130	2,5	0,31 $\pm$ 0,07	7	360	30	□	Тип К
12		025/17	белый		28 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,170	2,5	0,31 $\pm$ 0,07	15	360	65	□	Тип К
13		02/20	желтый	черный	31 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,200	2	0,31 $\pm$ 0,07	18	360	80	□	Тип К
14		02/25	красный		31 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,250	2	0,31 $\pm$ 0,07	30	360	120	□	Тип К
15		025/13	фиолетовый		31 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,130	2,5	0,31 $\pm$ 0,07	7	360	30	□	Тип К
16		025/17	белый		31 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,170	2,5	0,31 $\pm$ 0,07	15	360	65	□	Тип К

9.6. Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини.

Каждый набор инструментов включает ротационные файлы. Каждый файл состоит из хвостовика и оперативной части, которая изготовлена из специального никель-титанового сплава. На основании оперативной части расположен стоппер, который используется для обозначения рабочей длины файла. Штрих на стоппере идентифицирует оригинальное направление наконечника в корневом канале.

Наборы инструментов используются при подключении к активному медицинскому оборудованию (эндодонтический вращающийся наконечник, угловой наконечник с понижающим числом оборотов, диаметр 2,35 мм) и совершают вращательные движения с рекомендованной скоростью 400 оборотов в минуту с целью расширения корневого канала. Высокоэффективны для удаления инфицированного дентина с поверхности корневых каналов за счет режущей грани.

Изделия из набора являются многоразовыми и выдерживают до 10 использований.

Общий вид изделий, входящих в наборы, представлен на рисунке 6.


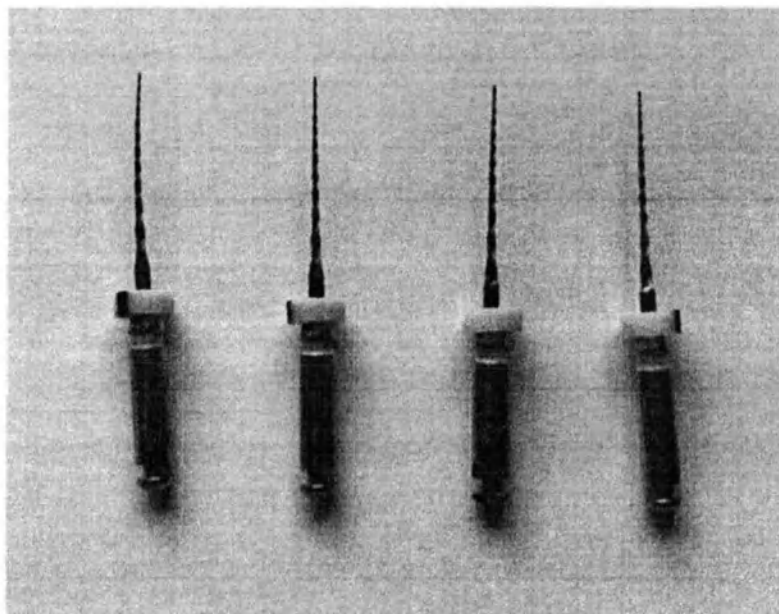


Рисунок 6. Общий вид изделий из наборов Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини

Габаритные характеристики изделий, входящих в наборы Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини, указаны в таблице 6, чертеже 6.


Масса изделий, входящих в наборы Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини, указана в таблице 6.

Rotary Endo Files Mini

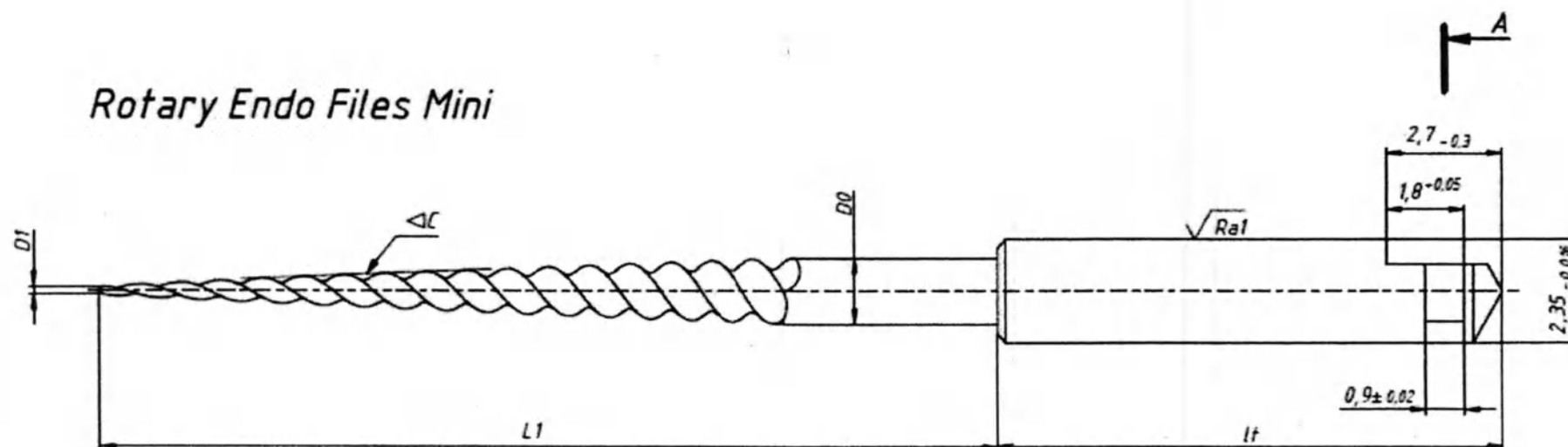

1. Твердость оперативная часть HRC35
2. Шероховатость оперативная часть Ra0.8
3. Габаритные характеристики изделий, входящих в наборы Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини, указаны в таблице 6

Обозначения на чертеже:
 Длина оперативной части $L1$
 Базовый диаметр $D0$
 Апикальное сужение $D1$
 Конусность C
 Длина хвостовика $lt = 11,13,2$ мм

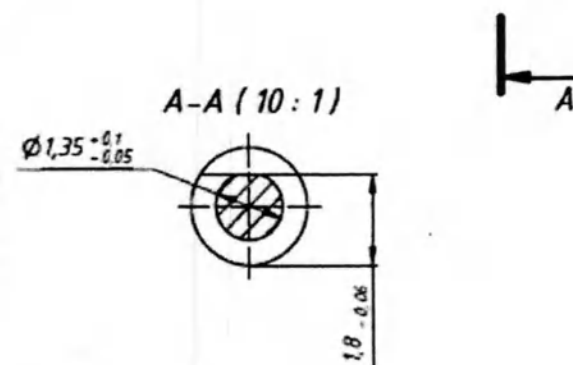

Чертеж 6. Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини

Таблица 6. Габаритные характеристики и масса изделий, входящих в наборы Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини

№	Наименование	Размер	Цветовая кодировка хвостовика	Цвет стоп-пера	Длина рабочей части L1, мм.	Базовый диаметр рабочей части D0, мм.	Апикальное сужение D1, мм, $\pm 0,02$	Конусность, С %, $\pm 0,05$	Масса, г.	Устойчивость к разрушению при скручивании и угловом отклонении		Изгибающий момент гс см, не более	Форма поперечного сечения	Тип инструмента
										Сопротивление разрушению (крутящий момент) гс см, мин.	Градусы углового отклонения (°), мин			
1.	Rotary Endo Files mini	03/20	желтый	желтый	16 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,200	3	0,31 $\pm$ 0,07	18	360	80	□	Тип К
2.		03/25	красный	желтый	16 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,250	3	0,31 $\pm$ 0,07	30	360	120	□	Тип К
3.		03/30	синий	желтый	16 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,300	3	0,31 $\pm$ 0,07	45	360	150	□	Тип К
4.		03/35	зеленый	желтый	16 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,350	3	0,31 $\pm$ 0,07	65	360	190	□	Тип К
5.		03/40	черный	желтый	16 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,400	3	0,31 $\pm$ 0,07	100	360	250	□	Тип К
6.		03/20	желтый	желтый	19 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,200	3	0,31 $\pm$ 0,07	18	360	80	□	Тип К
7.		03/25	красный	желтый	19 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,250	3	0,31 $\pm$ 0,07	30	360	120	□	Тип К
8.		03/30	синий	желтый	19 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,300	3	0,31 $\pm$ 0,07	45	360	150	□	Тип К
9.		03/35	зеленый	желтый	19 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,350	3	0,31 $\pm$ 0,07	65	360	190	□	Тип К
10.		03/40	черный	желтый	19 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,5	0,400	3	0,31 $\pm$ 0,07	100	360	250	□	Тип К


10. Сведения о типе хвостовика файлов.

Категория:

Хвостовик тип 1

Размеры:

Диаметр 2,35 мм

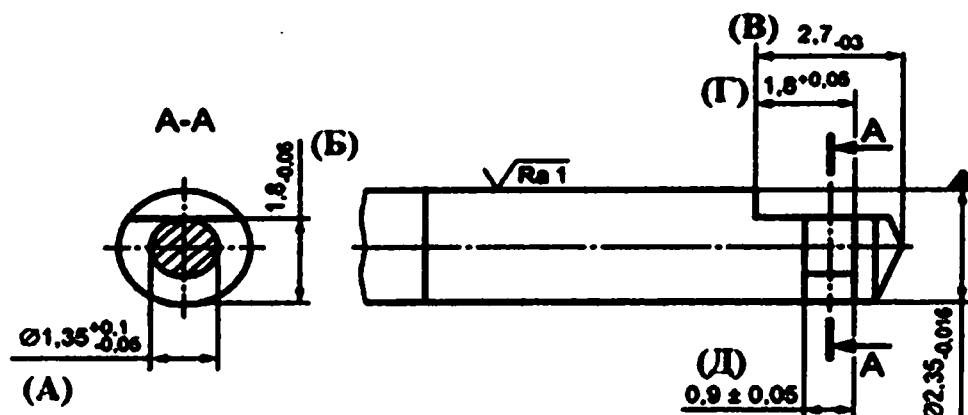

Шероховатость:

$Ra \leq 1$ мкм

11. Окружающая среда, условия применения изделия.

Медицинское изделие предназначено для применения в условиях больниц, специализированных клиник и оборудованных кабинетов для стоматологического лечения.

Освещенность рабочей зоны в пределах от 100 до 1500 лк.

Дальность видимости в рабочей зоне: от 10 до 1000 см.

Угол обзора: перпендикулярно глазам $\pm 60^\circ$.

Температура использования: от $+10$ до $+40^\circ\text{C}$.

Относительная влажность от 30% до 75%, без конденсации.

Атмосферное давление: 700-1060 гПа (525-795 мм рт. ст.).

12. Ограничения применения, совместимость с другими изделиями.

Машинные инструменты используются со стоматологическими наконечниками на рекомендованной скорости вращения. Машинные инструменты совместимы со стандартными стоматологическими наконечниками, соответствующими стандартам ISO 3964:2016, ISO 14457:2017, ISO 9687:2015, IEC 60601-1:2005.

Длительность непрерывной обработки канала инструментом не должна превышать 10 секунд.

Длительность использования инструмента для одного пациента обычно составляет не более 20 минут. Длительность совокупного применения инструментов для одного пациента во время одного посещения обычно не превышает 4 часов.

Для использования всегда следует выбирать инструмент надлежащего назначения и размера.

Машинные файлы совместимы со следующими стоматологическими установками:

1. «Система стоматологическая ENDO-MATE для эндодонтии, с принадлежностями» производства Nakanishi Inc. (Наканиши Инк.), Япония. РУ № РЗН 2018/7473 от 13.08.2018, срок действия бессрочно.
2. «Аппарат эндодонтический X-Smart iQ в различных комплектациях с принадлежностями», производства MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING Sàrl (МАЙЛЛЕФЕР ИНСТРУМЕНТС ХОЛДИНГ Сарл), Швейцария. РУ № РЗН 2017/6412 от 26.10.2017, срок действия бессрочно.
3. «Аппарат стоматологический Dentaport ZX (DP-ZX) Module TR-EX Ver. DP-TR3 для лечения корневых каналов с принадлежностями», производства MORITA MFG. CORP. (Дж. МОРИТА МФГ. КОРП.), Япония. РУ № РЗН 2016/5156 от 19.12.2016, срок действия бессрочно.
4. «Мотор эндодонтический для работы с вращающимися никель-титановыми инструментами «ЭндоЭст мотор-мини» по ТУ 9452-021-56755207-2012», производства АО "Геософт Дент", Россия. РУ № ФСР 2012/14153 от 08.04.2021, срок действия бессрочно.

Варианты исполнения:

- «ЭндоЭст Мотор-мини» (Basic) - базовая модель;
- «ЭндоЭст Мотор-мини» (Apexlocation-L) - модель с дополнительными функциями локализации апикального сужения корневого канала зуба (функция апекслокации) и подсветкой рабочей зоны;
- «ЭндоЭст Мотор-мини» (Reciprocation-L) - модель с дополнительными функциями локализации апикального сужения корневого канала зуба (функция апекслокации), реципрокного вращения инструментов и подсветкой рабочей зоны.

13. Описание принципов работы изделия.

Эндодонтический инструмент погружается в корневой канал зуба вращательным и/или возвратно-поступательными движениями с целью удаления содержимого канала, удаления со стенок каналов слоев дентина, расширения и спрямления канала, санации, obturation, создания условий для пломбирования каналов.

14. Материалы, применяемые при изготовлении изделий.

Компоненты изделия, контактирующие с организмом	Материалы, применяемые при изготовлении компонентов	Производитель материалов
Хвостовик инструментов.	Сталь нержавеющая марки 304L	«Shenzhen Haoyuan Special Steel Co., Ltd.» (Китай)
Оперативная часть инструментов.	Никель-титан сплав марки 60-Nitinol (Ni – 60%, Ti – 40%)	«Shanghai Allotech Industrial Co., Ltd.» (Китай)
Стопперы	Силикон (CAS 112926-00-8) марки A130	«Dongguan yongle rubber and plastic products Co., Ltd.» (Китай)
Кольцо цветового индикатора инструментов	Эмаль полиуретановая «фарфоровая» (CAS 9009-54-5) марки 364D	«Dongguan yongle rubber and plastic products Co., Ltd.» (Китай)
Пигменты цветообразующие (содержание от 0,01 до 0,99% в составе полимеров и эмалей)	Зеленый марки 6037 F; Черный марки 9005 F; Красный марки 3020 F; Синий марки 5005 F; Желтый марки 1016 F; Белый марки 9003 UV F; Фиолетовый марки GPPS-525	«Dongguan yongle rubber and plastic products Co., Ltd.» (Китай)

Изделие устойчиво к воздействию биологических жидкостей (кровь, слюна).

Изделие не содержит материалов человеческого или животного происхождения.

Изделие не содержит лекарственных средств.

Металлические части инструментов – значение параметров:

Тип инструмента	Твердость по Роквеллу	Предел прочности на излом	Предел прочности на изгиб	Предел шероховатости Ra, мкм
TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан	HRC45	$\sigma_{0,10}$ (MPa) ≥ 110	200 МПа	0,12
BLUE STORM Rotary Endo Files/БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы	HRC35	$\sigma_{0,12}$ (MPa) ≥ 110	250 МПа	0,11
S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы	HRC35	$\sigma_{0,12}$ (MPa) ≥ 110	250 МПа	0,11
G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы	HRC35	$\sigma_{0,10}$ (MPa) ≥ 110	200 МПа	0,12
SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы	HRC35	$\sigma_{0,20}$ (MPa) ≥ 98	300 МПа	0,10
Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини	HRC35	$\sigma_{0,12}$ (MPa) ≥ 110	250 МПа	0,11

15. Требования безопасности и меры предосторожности при эксплуатации.

Максимальная глубина проникновения в канал корня ограничена длиной рабочей части инструмента. Не использовать, если длины рабочей части недостаточно для полной глубины проникновения в канал.

Рекомендуется применять ирригационные растворы с содержанием ЭДТА (тринатрий, тетранатрий ЭДТА или их смесь) в сочетании с гипохлоритом натрия (NaOCl) для ирригации и смазывания корневого канала во избежание риска повреждения инструмента. Не использовать изделие при температуре 45°C и выше.

При использовании машинных инструментов требуется следовать инструкции по применению совместно используемых наконечников.

Избегать повышенной влажности при хранении инструментов во избежание повышенной ломкости металла, что может привести к поломке.

Несоблюдение требований предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации изделия создает риск перекрестной контаминации.

Изделие должно быть простерилизовано автоклавированием перед каждым применением.

Нельзя использовать изделие иным способом, кроме предназначенного. Изделие используется только для эндодонтического лечения подготовленным медицинским персоналом.

Нельзя использовать изделие из никель-титана при наличии информации об имеющемся у пациента аллергической реакции на никель.

Перед использованием требуется убедиться, что инструменты не имеют деформаций, царапин и трещин. После каждого применения и перед следующим применением инструмент должен быть проверен на наличие признаков деформации и износа.

При работе с машинными инструментами с использованием наконечника используйте вращение в сочетании с легким апикальным нажатием. Имеется опасность пломки, перекручивания, заклинивания машинного инструмента в корневом канале. Вследствие этого, избегайте работы под чрезмерным углом или давлением.

Требуется носить защитные очки или маску для защиты глаз от повреждений, а также предотвращения вдыхания пыли.

Требуется использовать коффердам (раббердам) у пациентов во избежание случайного падения инструмента в полость рта и заглатывания.

Во избежание коррозии не погружать изделие на длительное время в растворы с содержанием перекиси водорода, ЭДТА или гипохлорита натрия (NaOCl).

Избегать хранения при температуре выше 40°C, влажности выше 80% и длительного воздействия прямых солнечных лучей и УФ-излучения бактерицидных ламп.

Во время работы с машинными инструментами требуется обильная ирригация.

Для оптимального использования машинных инструментов рекомендуется использовать наконечники с контролем крутящего момента.

Применяя инструменты с острыми или режущими поверхностями, соблюдайте осторожность во избежание проколов и порезов.

В случае перелома (отлома) инструмента в корневом канале рекомендуется извлечь обломок при помощи ультразвуковой насадки.

Ручки или хвостовики, прикрепленные к рабочей части, должны быть надежно и прочно закреплены.

Инструменты не должны иметь осевого перемещения более чем на 0,02 мм от рукоятки или стержня.

Инструменты не должны скручиваться ни внутри рукоятки, ни внутри стержня при приложении указанного крутящего момента.

16. Требования к охране окружающей среды.

В процессе производства, хранения, эксплуатации и утилизации медицинское изделие полностью безопасно для окружающей среды. Изделие не поставляется энергией и не является источником излучения.

17. Очистка, дезинфекция.

После использования изделие подлежит очистке в проточной воде с применением щетки для очистки от биологических тканей.

Для дезинфекции эндодонтические инструменты помещают в раствор, состоящий из равных частей: 3% раствора перекиси водорода и 10% нашатырного спирта. Время замачивания – 1 час при комнатной температуре.

Нельзя оставлять инструменты в дезрастворе на ночь или выходные. Не следует применять хлороформ, гипохлорит натрия и фенолсодержащие дезсредства (карболовая кислота, ЭДТА и им подобные). Изделие может дать коррозию и стать непригодным к применению, если погружать его на длительное время в раствор с содержанием перекиси водорода, ЭДТА или гипохлорита натрия.

Может применяться ультразвуковая очистка. При ультразвуковой очистке помещайте изделие на подставку во избежание ухудшения качества режущих частей.

После дезинфекции инструменты промывают проточной водой, затем дистиллированной водой, затем высушивают.

18. Стерильность, стерилизация.

Упакованные изделия нестерильны. Требуется стерилизация автоклавированием перед каждым использованием.

Способ стерилизации: автоклавирование по установленной методике. Положите изделие в пакет или обертку для стерилизации и установите его на стерилизационном подносе для автоклавирования.

Условия стерилизации автоклавированием: температура $134^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ в течение 20 минут (+5 минут).

Не используйте паровой стерилизатор высокого давления, т.к. нагрев в нем достигает 200°C включая процесс сушки.

Перед стерилизацией после первого и последующих использований промойте и очистите инструмент.

Высушить ротационный эндодонтический файл с помощью ткани с низким содержанием волокон, а также высушите сухим или отфильтрованным сжатым воздухом. Температура сушки (сушильный шкаф) $70 \sim 90^{\circ}\text{C}$.

Хранение изделия после стерилизации и до повторного использования, не более 24 часов. Независимо от того, будет использован инструмент в течение этого времени или нет, по истечении 24 часов подлежит повторной обработке и стерилизации.

Условия хранения при этом соответствуют условиям применения (см. п. 11).



Необходимо утилизировать инструмент, если он поврежден или имеет сниженную производительность.



19. Упаковка медицинского изделия.


Инструменты эндодонтические для корневых каналов многоразового использования в наборах имеют следующий вариант упаковывания.

Вариант 1.

Каждый набор из 3, 4 и 6 файлов упаковывается в потребительскую упаковку – ячеистый блистер из алюминиевой фольги, марки 1145 с индивидуальными ячейками из ПВХ, марки SG-3. Количество ячеек в блистере соответствует кратности единиц изделия в наборе. Размер потребительской упаковки $75 \times 60 \times 6 \pm 2 \text{ мм}$. Масса упакованного изделия брутто, в зависимости от вариантов исполнения набора, составляет от 4,40 до 6,0г. Далее потребительские упаковки, в количестве 10 штук, укладываются в групповую тару из упаковочного картона.

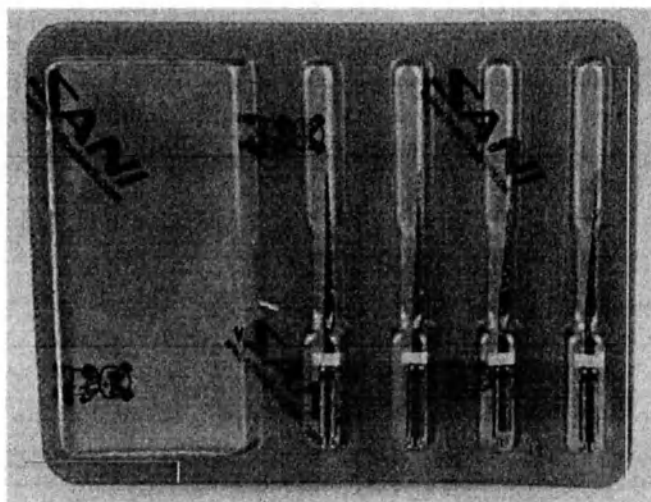
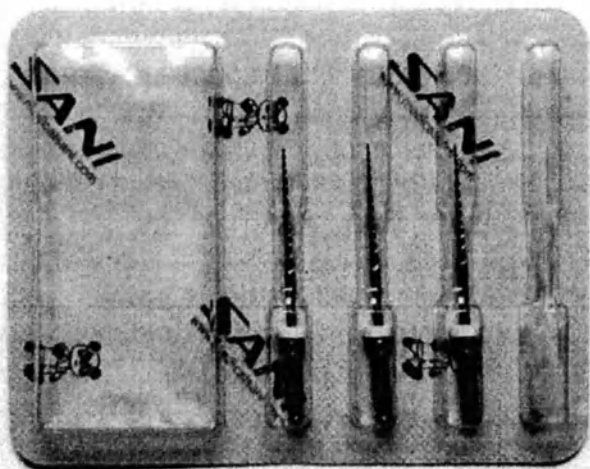


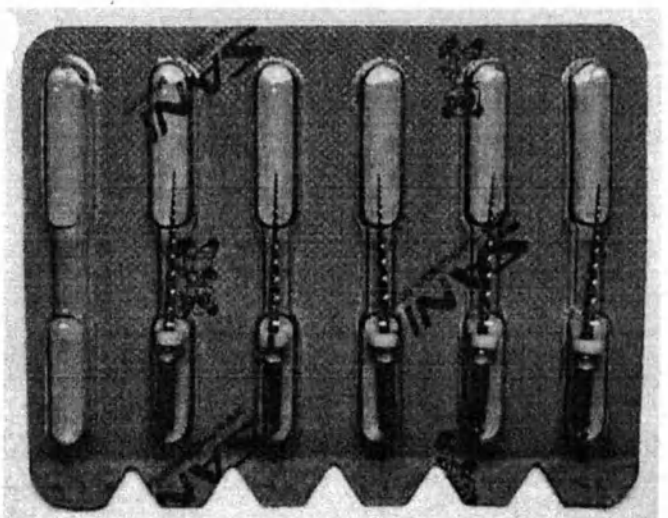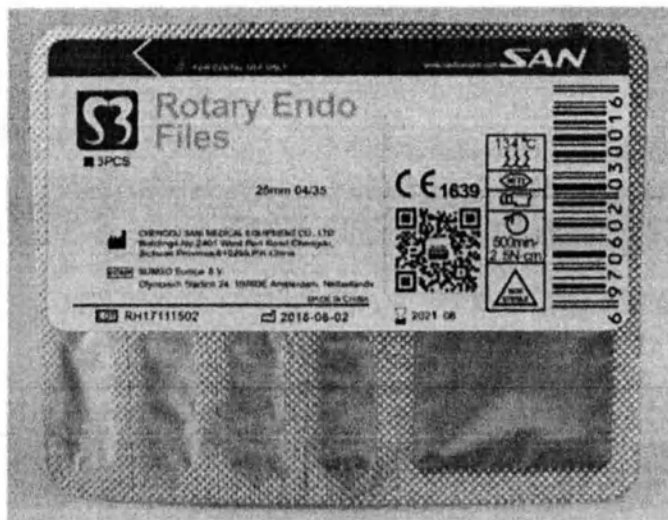

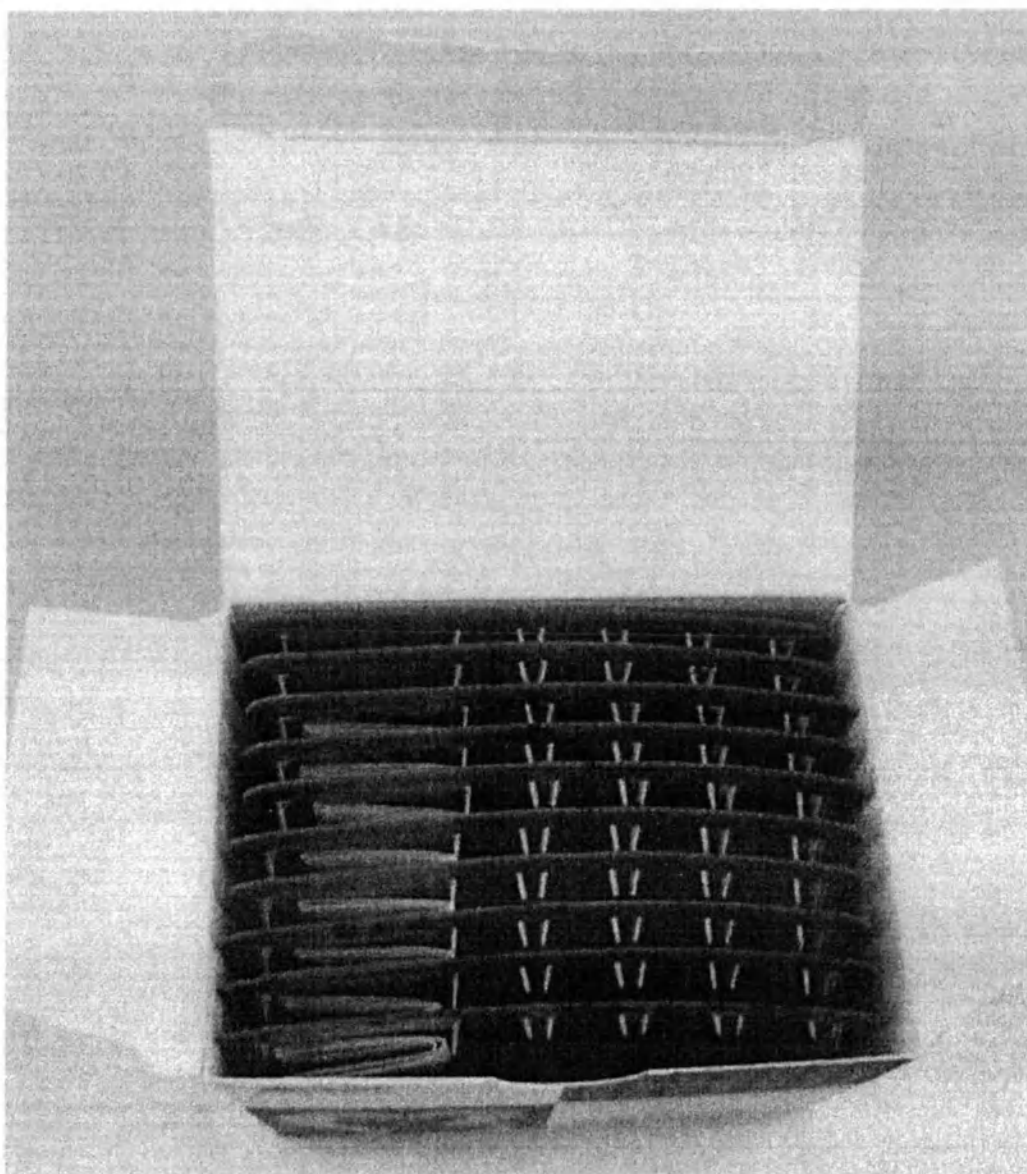

Вариант 2.

Каждый набор из 3, 4 или 6 файлов упаковываются в потребительскую упаковку из полистирола, марки GPPS-525. Размер потребительской упаковки 46x51x7±2мм. Масса упакованного изделия брутто, в зависимости от варианта исполнения набора, составляет от 10,2 до 11,2г. Товарная этикетка опечатана клейким ярлыком в месте предполагаемого открывания, предотвращая вскрытие до продажи конечному потребителю. Потребительские упаковки, в количестве 10 штук укладываются в групповую тару из упаковочного картона.

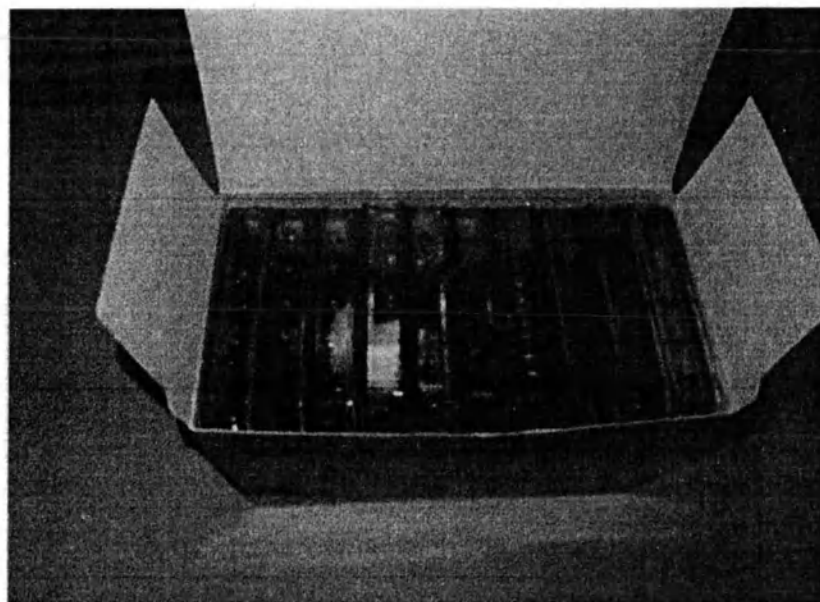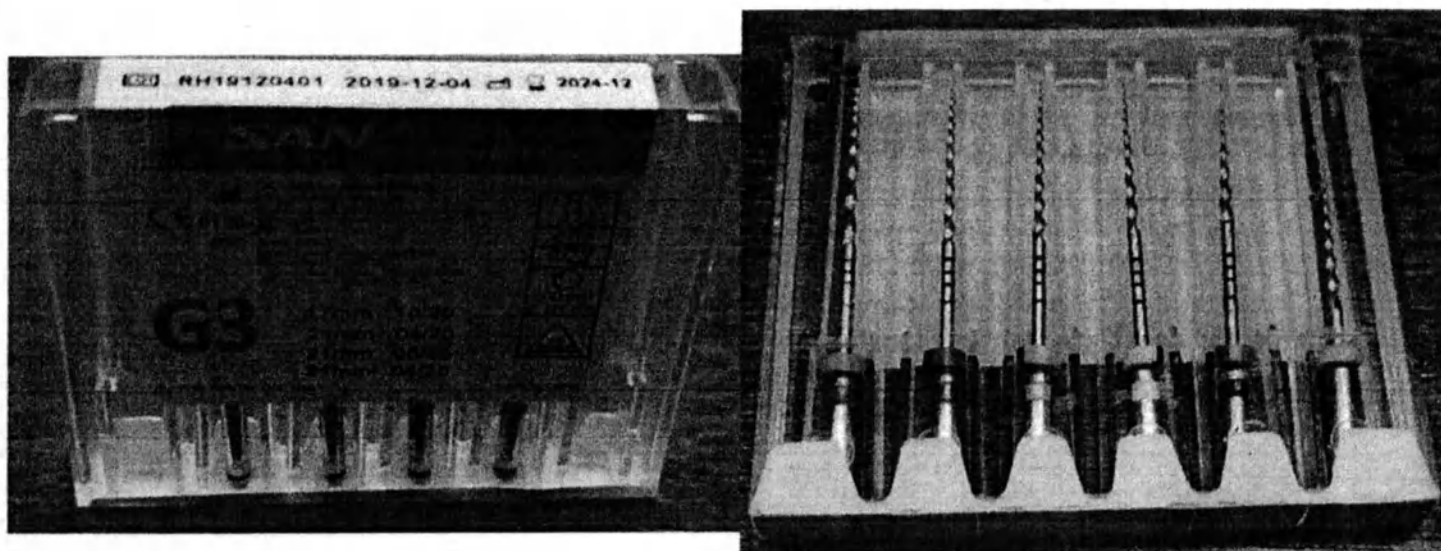

В соответствии с запросом потребителя несколько групповых упаковок из упаковочного картона укладываются в транспортную упаковку - коробку из гофрокартона. Одна картонная коробка вмещает до 60 транспортных упаковок из упаковочного картона. Масса брутто упакованной транспортной упаковки не превышает 1,5 кг.

20. Маркировка.

Маркировка выполнена типографическим печатным способом на бумажном ярлыке/наклейке непосредственно, нанесена на поверхность упаковки по ISO 15223-1, EN 1041, MDD 93/42/ЕЕС Приложение I статья 13 и Приложение XII, с учетом Директивы Совета 2007/47/ЕС.

Инструмент (ручка либо хвостовик):

- Цифровая, геометрическая, цветовая кодировка, номинальный размер (если применимо).

Потребительская и групповая упаковка:

- маркировка CE;
- наименование МИ, тип инструмента, номер РУ;
- длина инструмента;
- материал рабочей части;
- номинальный размер инструмента;
- сведения о производителе;
- сведения об уполномоченном представителе в РФ;
- цифровая, геометрическая, цветовая кодировка (если применимо);
- дата изготовления, окончание срока годности, номер партии (LOT);
- число инструментов в упаковке;
- символ «нестерильно»;
- условия стерилизации;
- символ «Осторожно»;
- символ «хвостовик для наконечников, машинное применение» (если применимо);
- номер Регистрационного удостоверения.

Транспортная упаковка:

- наименование МИ, номер РУ;
- наименование и адрес производителя;
- наименование и адрес уполномоченного представителя в РФ;
- перечень вариантов исполнения и число товарных упаковок внутри транспортной упаковки;
- знак климатических температурных значений при транспортировке;
- манипуляционные знаки «Осторожно. Хрупкое», «Беречь от влаги», «Верх»;
- номер Регистрационного удостоверения.

Символы, используемые в маркировке упаковки изделия: маркировка медицинского изделия выполняется в соответствии с требованиями ISO 15223-1. Символы, используемые в маркировке упаковки изделия перечислены в таблице:

Символ маркировки в соответствии с требованиями ISO 15223-1	Расшифровка символа
	Дата изготовления
	Производитель
	Код партии
	Европейский сертификат соответствия
	Предел температуры
	Хвостовик для наконечников, машинное применение
	Нестерильно
	Условия стерилизации
	Осторожно

	Никель-титановый сплав
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Беречь от влаги
	Верх

Образцы маркировки потребительской упаковки на русском языке.

Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан

LOT

Количество: 3*1 шт.

Спецификация:

Размеры D1 ☒ D2 ☒ D3 ☒

Длина инструмента: 16 мм ☒ 19 мм ☒ 21 мм ☒



Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд), No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXX



XX/XXXX



Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан

LOT

RH20110330

Количество: 3*1 шт.

Спецификация:

Размеры D1 ☒ D2 ☒ D3 ☒

Длина инструмента: 16 мм ☒ 19 мм ☒ 21 мм ☒



Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд), No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXX



XX/XXXX



Набор BLUE STORM Rotary Endo Files/БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо
Файлы

LOT

Количество: 3*1 шт.

Спецификация:

Размеры 025/17 ☒ 04/20 ☒ 06/25 ☒

Длина инструмента: 31 мм ☒



Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд),
No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu
District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1,
литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXX



XX/XXXX



134°C



Набор BLUE STORM Rotary Endo Files/БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо
Файлы

LOT

RH20110336

Количество: 3*1 шт.

Спецификация:

Размеры 025/17 ☒ 04/20 ☒ 06/25 ☒

Длина инструмента: 21 мм ☒



Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд),
No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu
District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1,
литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXX



XX/XXXX



134°C



Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы

LOT

Количество: 4*1 шт.

Спецификация:

Размеры 10/20 ☒ 04/20 ☒ 06/25 ☒ 04/35 ☒

Длина инструмента: 17 мм ☒ 25 мм ☒



Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд), No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXX



XX/XXXX

NITI



134°C



CE

Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы

LOT

RH20092802

Количество: 4*1 шт.

Спецификация:

Размеры 10/20 ☒ 04/20 ☒ 06/25 ☒ 04/35 ☒

Длина инструмента: 17 мм ☒ 25 мм ☒



Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд), No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXX



XX/XXXX

NITI



134°C



NON
STERILE

CE

LOT

Длина инструмента: 17 мм ☒ 31 мм ☒



Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXX



XX/XXXX



134°C



LOT

RH20110339

Количество: 4*1 шт.

Спецификация:

Размеры 10/20 ☒ 04/20 ☒ 06/25 ☒ 04/35 ☒

Длина инструмента: 17 мм ☒ 31 мм ☒



Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд),
No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu
District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1,
литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXX



XX/XXXX



134°C



Набор SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные
Эндо Файлы

LOT

Количество: 6 шт.

Спецификация:

Размеры: 025/13*3 шт. ☒ 025/17*3 шт. ☒

Длина инструмента: 21 мм ☒



Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд),
No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu
District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1,
литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXXX



XX/XXXXX



134°C



Набор SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные
Эндо Файлы

LOT

RH20110347

Количество: 6 шт.

Спецификация:

Размеры 025/13*3 шт. ☒ 025/17*3 шт. ☒

Длина инструмента: 31 мм ☒



Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд),
No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu
District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1,
литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXXX



XX/XXXXX



134°C



Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини

LOT

Количество: 3*1 шт.

Спецификация:

Размеры 03/20 ☒ 03/25 ☒ 03/30 ☒

Длина инструмента: 16 мм ☒



Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд), No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXX



XX/XXXX

NITI



134°C



CE

Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини

LOT

RH19022503

Количество: 3*1 шт.

Спецификация:

Размеры 03/20 ☒ 03/25 ☒ 03/30 ☒

Длина инструмента: 16 мм ☒



Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд), No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXX



XX/XXXX

NITI



134°C



CE

Образцы маркировки групповой упаковки на русском языке.

Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан

LOT

Количество: 3*1 шт. (10 блистеров)

Спецификация:

Размеры D1 ☒ D2 ☒ D3 ☒

Длина инструмента: 16 мм ☒ 19 мм ☒ 21 мм ☒

Инструкция по эксплуатации медицинского изделия 1 шт.



Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд), No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXX



XX/XXXX



134°C



Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан

LOT

RH20110330

Количество: 3*1 шт. (10 блистеров)

Спецификация:

Размеры D1 ☒ D2 ☒ D3 ☒

Длина инструмента: 16 мм ☒ 19 мм ☒ 21 мм ☒

Инструкция по эксплуатации медицинского изделия 1 шт.



Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд), No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXX



XX/XXXX



134°C



Набор BLUE STORM Rotary Endo Files/БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы

LOT

Количество: 3*1 шт. (10 блистеров)

Спецификация:

Размеры 025/17 ☒ 04/20 ☒ 06/25 ☒

Длина инструмента: 31 мм ☒

Инструкция по эксплуатации медицинского изделия 1 шт.



134°C



Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд), No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXX



XX/XXXX



SANI
www.sanimedical.com

Набор BLUE STORM Rotary Endo Files/БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы

LOT

RH20110333

Количество: 3*1 шт. (10 блистеров)

Спецификация:

Размеры 06/15 ☒ 04/25 ☒ 04/30 ☒

Длина инструмента: 21 мм ☒

Инструкция по эксплуатации медицинского изделия 1 шт.



134°C



Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд), No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXX



XX/XXXX



Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы

LOT


Количество: 4*1 шт. (10 блистеров)

Спецификация:

Размеры 10/20 ☒ 04/20 ☒ 06/25 ☒ 04/35 ☒

Длина инструмента: 17 мм ☒ 25 мм ☒

Инструкция по эксплуатации медицинского изделия 1 шт.

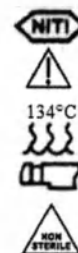

Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд),
No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu
District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1,
литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXX



XX/XXXX

CE

SANI®
www.dentalsani.com

Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы

LOT

RH20092802


Количество: 4*1 шт. (10 блистеров)

Спецификация:

Размеры 10/20 ☒ 04/20 ☒ 06/25 ☒ 04/35 ☒

Длина инструмента: 17 мм ☒ 25 мм ☒

Инструкция по эксплуатации медицинского изделия 1 шт.

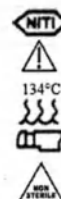

Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд),
No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu
District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1,
литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXX



XX/XXXX

CE

Набор G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы

LOT

Количество: 4*1 шт. (10 блистеров)

Спецификация:

Размеры 10/20 ☒ 04/20 ☒ 06/25 ☒ 04/35 ☒

Длина инструмента: 17 мм ☒ 31 мм ☒

Инструкция по эксплуатации медицинского изделия 1 шт.

NITI



134°C



NON
STERILE



Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд),
No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu
District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1,
литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXX



XX/XXXX

CE

Набор G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы

LOT

RN19120302

Количество: 4*1 шт. (10 блистеров)

Спецификация:

Размеры 10/20 ☒ 04/20 ☒ 06/25 ☒ 04/35 ☒

Длина инструмента: 17 мм ☒ 25 мм ☒

Инструкция по эксплуатации медицинского изделия 1 шт.

NITI



134°C



NON
STERILE



Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд),
No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu
District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1,
литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXX



XX/XXXX

CE

Набор SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные
Эндо Файлы

LOT


Количество: 6 шт. (10 блистеров)

Спецификация:

Размеры 025/13*3 шт. ☒ 025/17*3 шт. ☒

Длина инструмента: 21 мм ☒

Инструкция по эксплуатации медицинского изделия 1 шт.

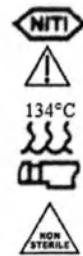

Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд),
No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu
District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1,
литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXX



XX/XXXX



Набор SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные
Эндо Файлы

LOT

RH20110342


Количество: 3*1 шт. (10 блистеров)

Спецификация:

Размеры 02/20 ☒ 02/25 ☒ 025/17 ☒

Длина инструмента: 28 мм ☒

Инструкция по эксплуатации медицинского изделия 1 шт.

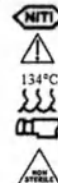

Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд),
No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu
District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1,
литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXX



XX/XXXX



Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини

LOT

Количество: 3*1 шт. (10 блистеров)

Спецификация:

Размеры 03/20 ☒ 03/25 ☒ 03/30 ☒

Длина инструмента: 16 мм ☒

Инструкция по эксплуатации медицинского изделия 1 шт.

NITI



134°C



Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд),
No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu
District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1,
литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXX



XX/XXXX



SANI

Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини

LOT

RH19022503

Количество: 3*1 шт. (10 блистеров)

Спецификация:

Размеры 03/20 ☒ 03/25 ☒ 03/30 ☒

Длина инструмента: 16 мм ☒

Инструкция по эксплуатации медицинского изделия 1 шт.

NITI



134°C



Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд),
No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu
District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1,
литера б, ком/оф/эт 10/515/5.

Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.



XX/XX/XXXX



XX/XXXX



Образец маркировки транспортной упаковки

Инструменты эндодонтические SANI для корневых каналов многоразового использования в наборах для машинного применения, варианты исполнения

РУ РЗН №.....

SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы

Спецификация:

Размер:

0,25/17 ☒ 02/20 ☒ 02/25 ☒

Длина инструмента:

25 мм ☒

Кол.-во: NN уп. (по 10 блистеров в уп.)



Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд), No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, литера б, ком/оф/эт 10/515/5. Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru



Инструменты эндодонтические SANI для корневых каналов многоразового использования в наборах для машинного применения, варианты исполнения

РУ № РЗН 2023/21137 от XX.XX.XXXX г.

SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы

Спецификация:

Размер:

025/17 ☒ 02/20 ☒ 02/25 ☒

Длина инструмента:

25 мм ☒

Кол.-во: №№ уп. (по 10 блистеров в уп.)



Производитель:

Chengdu Sani Medical Equipment Co., Ltd (Чэнгду Сани Медикал Эквипмент Ко., Лтд), No.408, Tengfei 4th Road, Southwest Airport Economic Development Zone, Shuangliu District, Chengdu, Sichuan Province, 610207, P.R.China (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "ЭНДОМАРКЕТ", 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, литера б, ком/оф/эт 10/515/5. Тел.: +7 903 000 22 49 E-mail: endo-market@mail.ru



20.1. Комплектация.

1. TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан, варианты исполнения:

1. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе:

- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер D1, длина 16 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер D2, длина 19 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер D3, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

2. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе:

- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер SX, длина 19 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер S1, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер S2, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F1, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F2, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F3, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

3. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе:

- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер SX, длина 19 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер S1, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер S2, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F1, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F2, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F3, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

4. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе:

- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер SX, длина 19 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер S1, длина 28 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер S2, длина 28 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F1, длина 28 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F2, длина 28 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F3, длина 28 мм, никель-титан, 1 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

5. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе:

- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер SX, длина 19 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер S1, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер S2, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F1, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F2, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
- TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F3, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

6. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе: TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер VT/10, длина 16 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп./шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

7. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе: TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер VT/15, длина 16 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

8. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе: TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер VT/19, длина 16 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

87. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе: TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F3, длина 28 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

88. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе: TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер S1, длина 31 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

89. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе: TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер S2, длина 31 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

90. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе: TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F1, длина 31 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

91. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе: TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F2, длина 31 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

92. Набор TAPER FILE Nickel Titanium /Тэйпер Файл никель-титан в составе: TAPER FILE /Тэйпер Файл: размер F3, длина 31 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

II. BLUE STORM Rotary Endo Files/БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, варианты исполнения:

1. BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы в составе:

- BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, размер 06/15, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.

- BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.

- BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

2. BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы в составе:

- BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, размер 6/15, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.

- BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.

- BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

3. BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы в составе:

- BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, размер 06/15, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.

- BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.

- BLUE STORM Rotary Endo Files /БЛЮ СТОРМ Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

4. Набор BLUE STORM Rotary Endo Files в составе:

- ООО ЦРПМ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- ООО ЦРПМ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- ООО ЦРПМ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- ООО ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/15, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 21мм, никель-титан, 1 шт.
- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
- 2. Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы в составе:
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/15, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 25мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
- 3. Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы в составе:
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/15, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
- 4. Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы в составе:
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 025/17, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/20, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/25, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
- 5. Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы в составе:
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 025/17, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/20, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/25, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
- 6. Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы в составе:
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 025/17, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/20, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/25, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
- 7. Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы в составе:
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 10/20, длина 17 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/18, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.

- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/25, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/35, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
8. Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы в составе:
- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 10/20, длина 17 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/18, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/25, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/35, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
9. Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы в составе:
- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 10/20, длина 17 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/18, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/25, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/35, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
10. Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы в составе:
- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 10/20, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 03/15, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/20, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/35, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
11. Набор S3 Rotary Endo Files/ C3 Ротационные Эндо Файлы в составе:
- S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 10/20, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 03/15, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/20, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - S3 Rotary Endo Files/C3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/35, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- ООО ЦРПМ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

IV. G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, варианты исполнения:

1. Набор G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы в составе:

- G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 06/15, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
- G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
- G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

2. Набор G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы в составе:

- G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 06/15, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
- G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
- G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

3. Набор G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы в составе:

- G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 06/15, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
- G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
- G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

4. Набор G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы в составе:

- G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 025/17, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
- G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 04/20, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
- G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 06/25, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

5. Набор G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы в составе:

- G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 025/17, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
- G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 04/20, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
- G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 06/25, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

6. Набор G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы в составе:

- G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 025/17, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
- G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 04/20, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
- G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 06/25, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

7. Набор G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы в составе:

- G3 Rotary Endo Files/ ГЗ Ротационные Эндо Файлы, размер 10/20, длина 17 мм, никель-титан, 1 шт.

- G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/18, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/25, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/35, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
8. Набор G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы в составе:
- G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 10/20, длина 17 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/18, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/25, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/35, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
9. Набор G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы в составе:
- G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 10/20, длина 17 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/18, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 06/25, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/35, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
10. Набор G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы в составе:
- G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 10/20, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 03/15, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/20, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/35, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
11. Набор G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы в составе:
- G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 10/20, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 03/15, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/20, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/25, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
 - G3 Rotary Endo Files/ Г3 Ротационные Эндо Файлы, размер 04/30, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.

-

- ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- ООО ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

V.SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, варианты исполнения:

1. Набор SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы в составе:

- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 02/20, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 02/25, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 025/17, длина 21 мм, никель-титан, 1 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

2. Набор SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы в составе:

- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 02/20, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 02/25, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 025/17, длина 25 мм, никель-титан, 1 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

3. Набор SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы в составе:

- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 02/20, длина 28 мм, никель-титан, 1 шт.
- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 02/25, длина 28 мм, никель-титан, 1 шт.
- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 025/17, длина 28 мм, никель-титан, 1 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

4. Набор SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы в составе:

- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 02/20, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 02/25, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 025/17, длина 31 мм, никель-титан, 1 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

5. Набор SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы в составе:

- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 025/13, длина 21 мм, никель-титан, 3 шт.
- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 025/17, длина 21 мм, никель-титан, 3 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

6. Набор SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы в составе:

- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 025/13, длина 25 мм, никель-титан, 3 шт.
- SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 025/17, длина 25 мм, никель-титан, 3 шт.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
- 19. Набор SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы в составе: SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 025/13, длина 28 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
- 20. Набор SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы в составе: SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 025/17, длина 28 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
- 21. Набор SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы в составе: SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 02/20, длина 31 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
- 22. Набор SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы в составе: SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 02/25, длина 31 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
- 23. Набор SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы в составе: SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 025/13, длина 31 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
- 24. Набор SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы в составе: SUPER PASS Rotary Endo Files/СУПЕР ПАСС Ротационные Эндо Файлы, размер 025/17, длина 31 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

VI. Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини, варианты исполнения:

1. Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини в составе:
 - Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/20, длина 16 мм, никель-титан, 1 шт.
 - Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/25, длина 16 мм, никель-титан, 1 шт.
 - Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/30, длина 16 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
2. Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини в составе:
 - Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/20, длина 19 мм, никель-титан, 1 шт.
 - Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/25, длина 19 мм, никель-титан, 1 шт.
 - Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/30, длина 19 мм, никель-титан, 1 шт.
 - инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
3. Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини в составе: Rotary Endo Files Mini/ Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/20, длина 16 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
4. Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини в составе: Rotary Endo Files Mini/ Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/25, длина 16 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

5. Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини в составе: Rotary Endo Files Mini/ Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/30, длина 16 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
6. Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини в составе: Rotary Endo Files Mini/ Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/35, длина 16 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
7. Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини в составе: Rotary Endo Files Mini/ Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/40, длина 16 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
8. Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини в составе: Rotary Endo Files Mini/ Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/20, длина 19 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
9. Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини в составе: Rotary Endo Files Mini/ Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/25, длина 19 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
10. Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини в составе: Rotary Endo Files Mini/ Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/30, длина 19 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
11. Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини в составе: Rotary Endo Files Mini/ Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/35, длина 19 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.
12. Набор Rotary Endo Files Mini/Ротационные Эндо Файлы Мини в составе: Rotary Endo Files Mini/ Ротационные Эндо Файлы Мини, размер 03/40, длина 19 мм, никель-титан, в следующей комплектации: 3; 4; 5; 6 шт./уп.
- инструкция по эксплуатации медицинского изделия – 1 шт.

21. Транспортировка медицинского изделия.

Транспортировка может осуществляться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с действующими на них правилами перевозки грузов при температуре воздуха от -25 до +50°C и относительной влажности воздуха не более 80%. После транспортирования в условиях отрицательных температур изделий в транспортной таре должно быть выдержано при нормальных климатических условиях хранения (температура воздуха от +5 до +40°C, влажность не более 80%) в течение 24 часов перед использованием.

22. Хранение, срок годности медицинского изделия.

Срок хранения медицинского изделия составляет 5 лет с момента производства. Дата производства считается дата, указанная на маркировке товарной упаковки. Хранить изделие рекомендуется при температуре в диапазоне от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% в сухом проветриваемом месте, защищенном от прямого солнечного света.

Изделие допустимо к повторному применению ограниченное количество раз, но не более 10 использований в зависимости от исполнения инструмента, учитывая стерилизацию перед каждым применением.

После каждого применения, очистки и дезинфекции изделия требуется визуально проверять инструмент на наличие деформаций и признаков износа. Количество применений изделия может не превысить одного раза при наличии деформации и признаков износа, что зависит от техники использования инструмента и характеристик корневых каналов.

23. Техническое обслуживание и ремонт медицинского изделия.

Изделие не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

24. Гарантийные обязательства производителя.

Производитель обеспечивает гарантийные обязательства на медицинское изделие. Производитель гарантирует качество продукта в течение его срока хранения, составляющего 5 лет с даты производства, при соблюдении условий хранения, инструкций по применению. Гарантийное количество циклов применения изделий: 1 цикл.

25. Подача рекламаций.

Претензии по поводу качества медицинского изделия направляются в адрес производителя, а также в адрес уполномоченного представителя на территории РФ.

26. Утилизация и уничтожение медицинского изделия.

Утилизация и уничтожение осуществляется в соответствии с классификацией, правилами сбора, использования, обезвреживания, размещения, зранения, транспортировки, учета и утилизации медицинских отходов, установленных уполномоченным органом власти страны-импортера.

После истечения срока годности неиспользованное медицинское изделие в невскрытой упаковке необходимо утилизировать в качестве медицинских отходов класса А.

Изделия без упаковки утилизируются с применением безопасных непрокальваемых контейнеров для сбора игл.

Использованное в течение срока годности изделие должно быть подвергнуто очистке и дезинфекции, и утилизировано в соответствии с правилами утилизации медицинских отходов класса Б, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

Изделие, получившее повреждения в процессе применения, подлежит утилизации после очистки и дезинфекции в соответствии с правилами утилизации медицинских отходов класса Б.

СЕРТИФИКАТ

/ЛОГОТИП/
ССРП

Китайский комитет содействия развитию международной торговли
Китайская палата международной торговли

02271172

Круглая наклейка:
ССРІТ

Китайский комитет содействия развитию международной торговли
Китайская палата международной торговли

/QR-код/

СЕРТИФИКАТ

№ 255101A0/000196

Печать:
КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ
СЕРТИФИКАТ
ССРІТ
(48)

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО: печать компании «ЧЭНДУ САНИ МЕДИКАЛ ЭКВИПМЕНТ КО., ЛТД.» (CHENGDU SANI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.) на прилагаемом ДОКУМЕНТЕ является подлинной.

Рельефная печать:
ССРІТ
СЕРТИФИКАТ
(48)

Китайский комитет содействия развитию
международной торговли

Печать:
КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ
СЕРТИФИКАТ
ССРІТ
(48)

/Подпись/

Подпись уполномоченного лица: Ге Йе
Дата: 13 февраля 2025 г.

Веб-сайт для проверки сертификата: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

**«ЧЭНДУ САНИ МЕДИКАЛ ЭКВИПМЕНТ КО., ЛТД.» (CHENGDU SANI MEDICAL
EQUIPMENT CO., LTD.)**

САНИ (SANI)

Печать:

**«ЧЭНДУ САНИ МЕДИКАЛ ЭКВИПМЕНТ КО., ЛТД.»
(CHENGDU SANI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.)**

5101160164548

Печать:

**КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ
СЕРТИФИКАТ**

ССРП

(48)

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Батулиной Александрой Андреевной.

ПОДПИСЬ

Российская Федерация
Город Москва

Девятнадцатого февраля две тысячи двадцать пятого года

Я, Корсик Мария Александровна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Батулиной Александры Андреевны.

Подпись сделана в моём присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2025-12-1001

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

ПОДПИСЬ

М.А. Корсик

Гербовая печать
нотариуса г.Москвы
Корсик М. А.

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 285 лист(а)(ов)

Нотариус

ПОДПИСЬ



Российская Федерация
Город Москва

Девятнадцатого февраля две тысячи двадцать пятого года

Я, Корсик Мария Александровна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность копии с представленного документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2025-12-1002

Уплачено за совершение нотариального действия: 600 руб. 00 коп.

М.А. Корсик

Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 285 лист(а)(ов)

Нотариус

М.А. Корсик