



***Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия «Электрод для
электрокардиографии, одноразовый», в
вариантах исполнения***




Электрод для электрокардиографии, одноразовый, круглый, из вспененного материала, взрослый, размер 55 мм

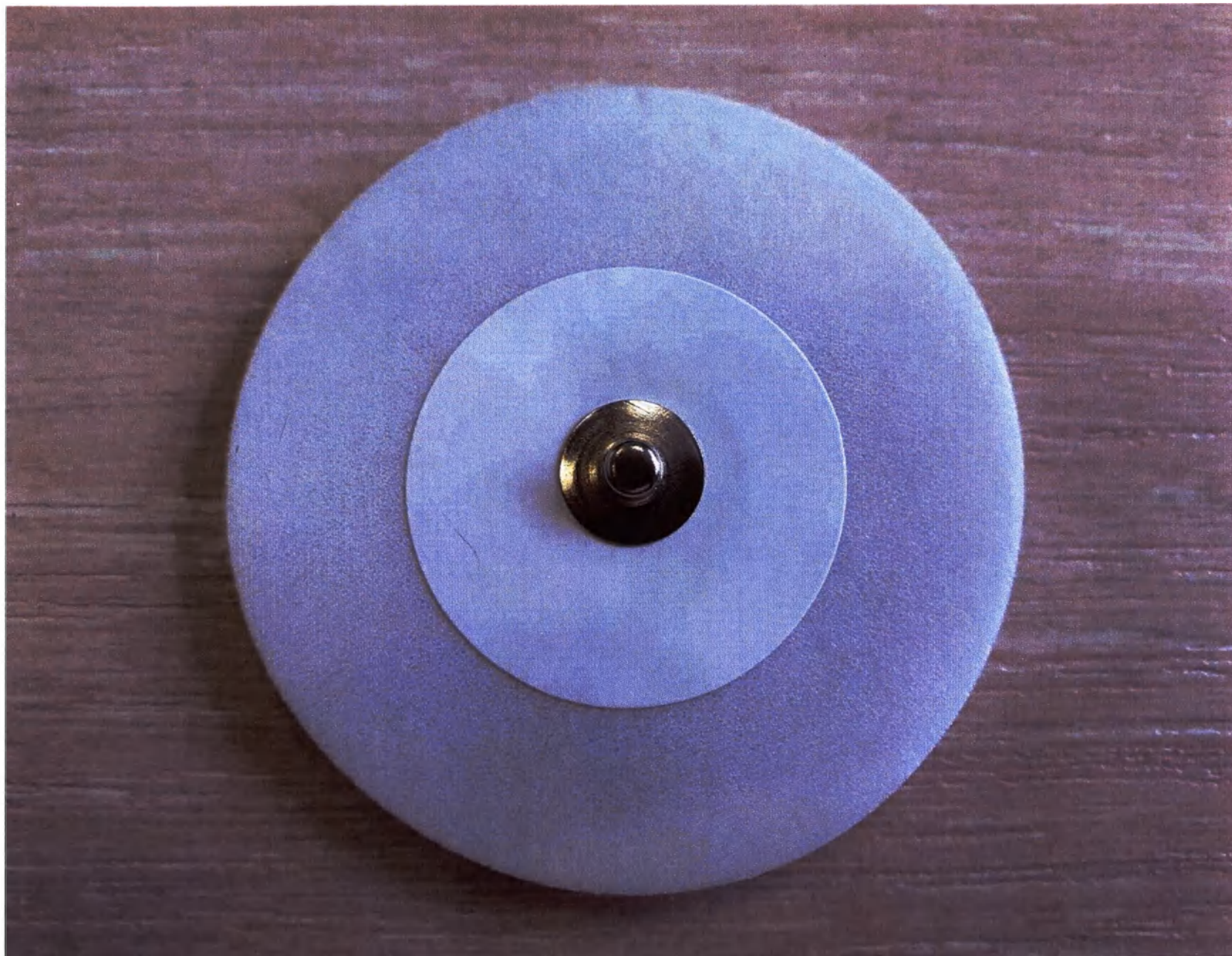


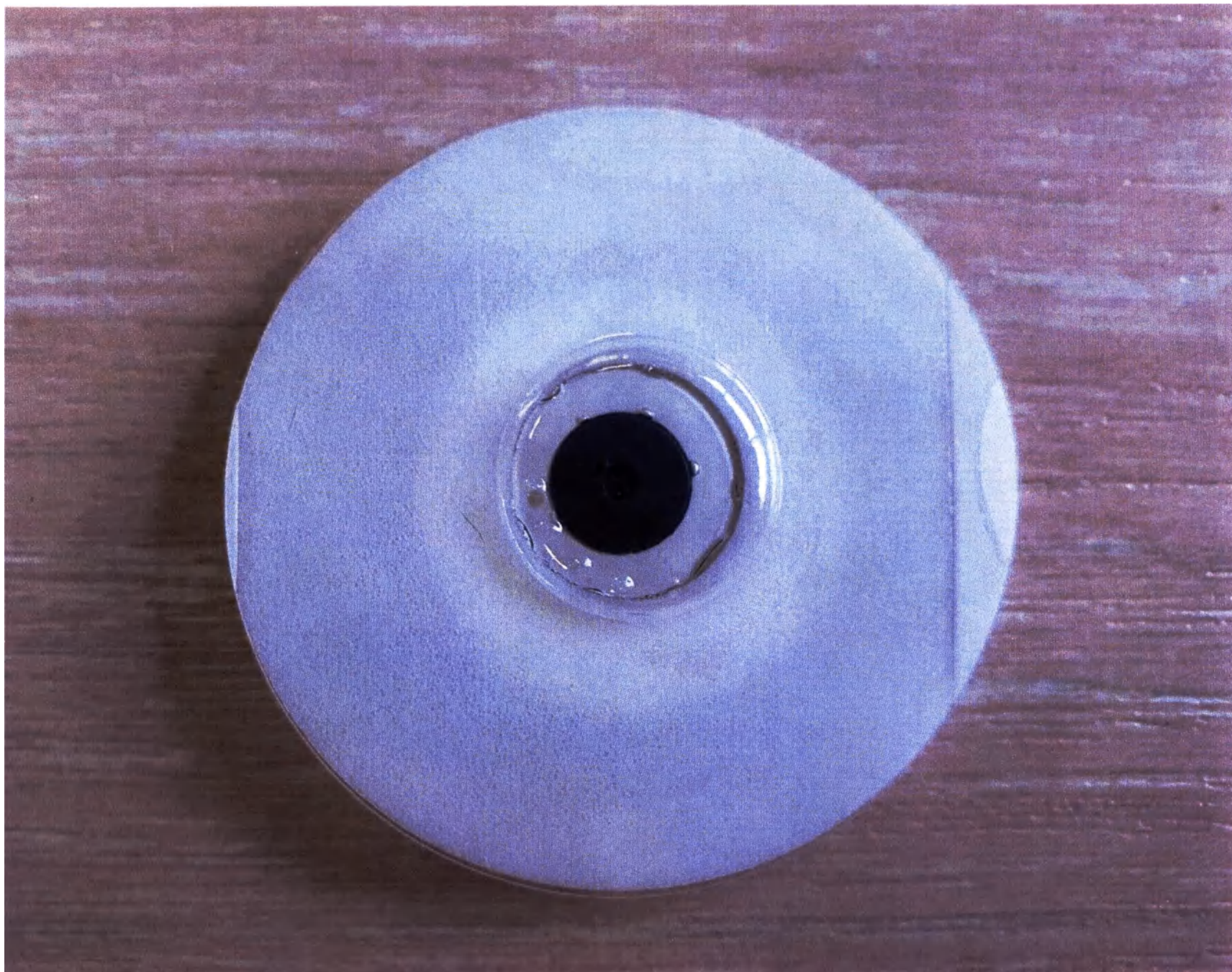


Электрод для электрокардиографии, одноразовый, круглый, из вспененного материала, педиатрический, размер 26 мм

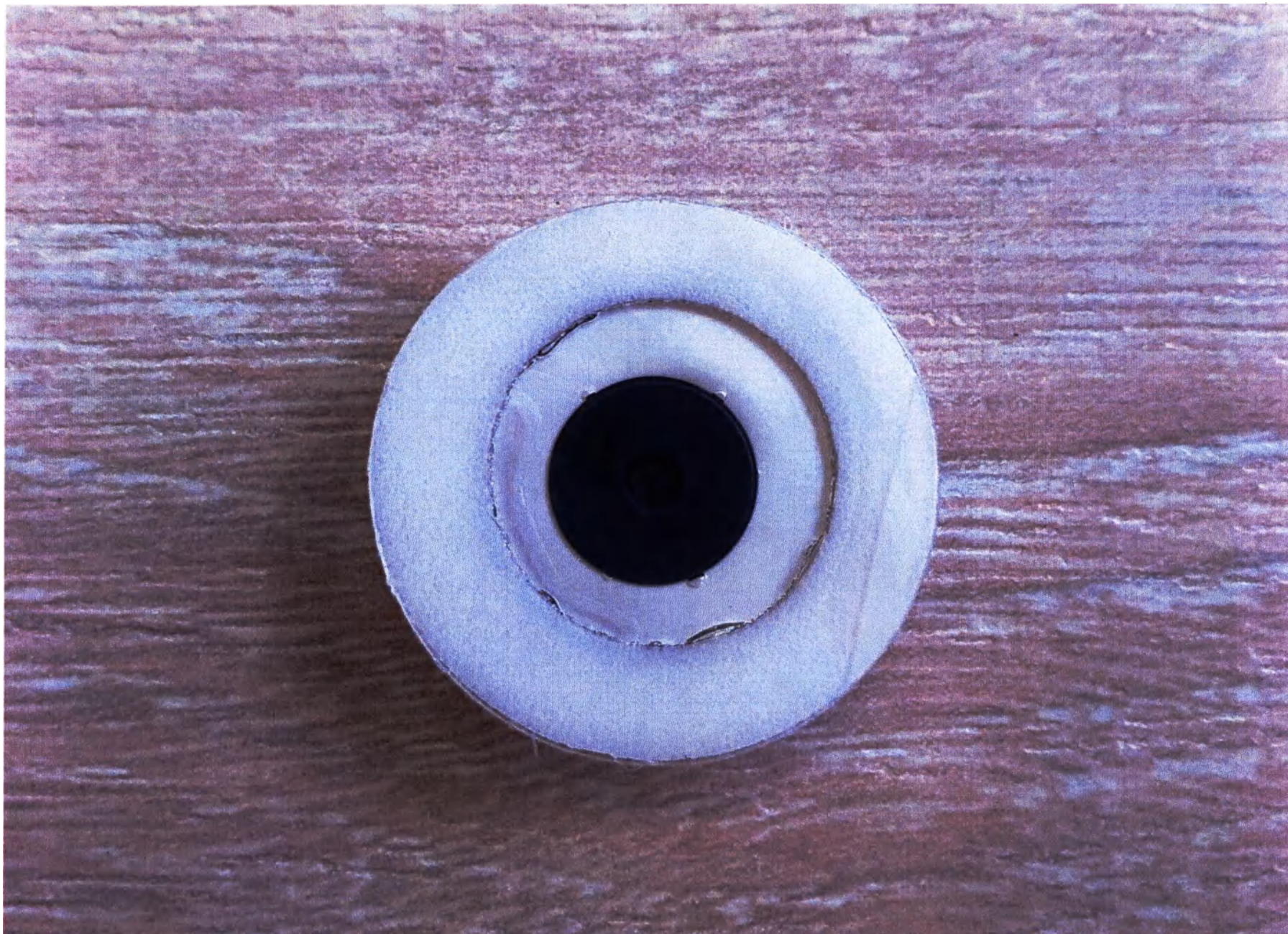


Электрод для электрокардиографии, одноразовый, круглый, из вспененного материала, педиатрический, размер 26 мм

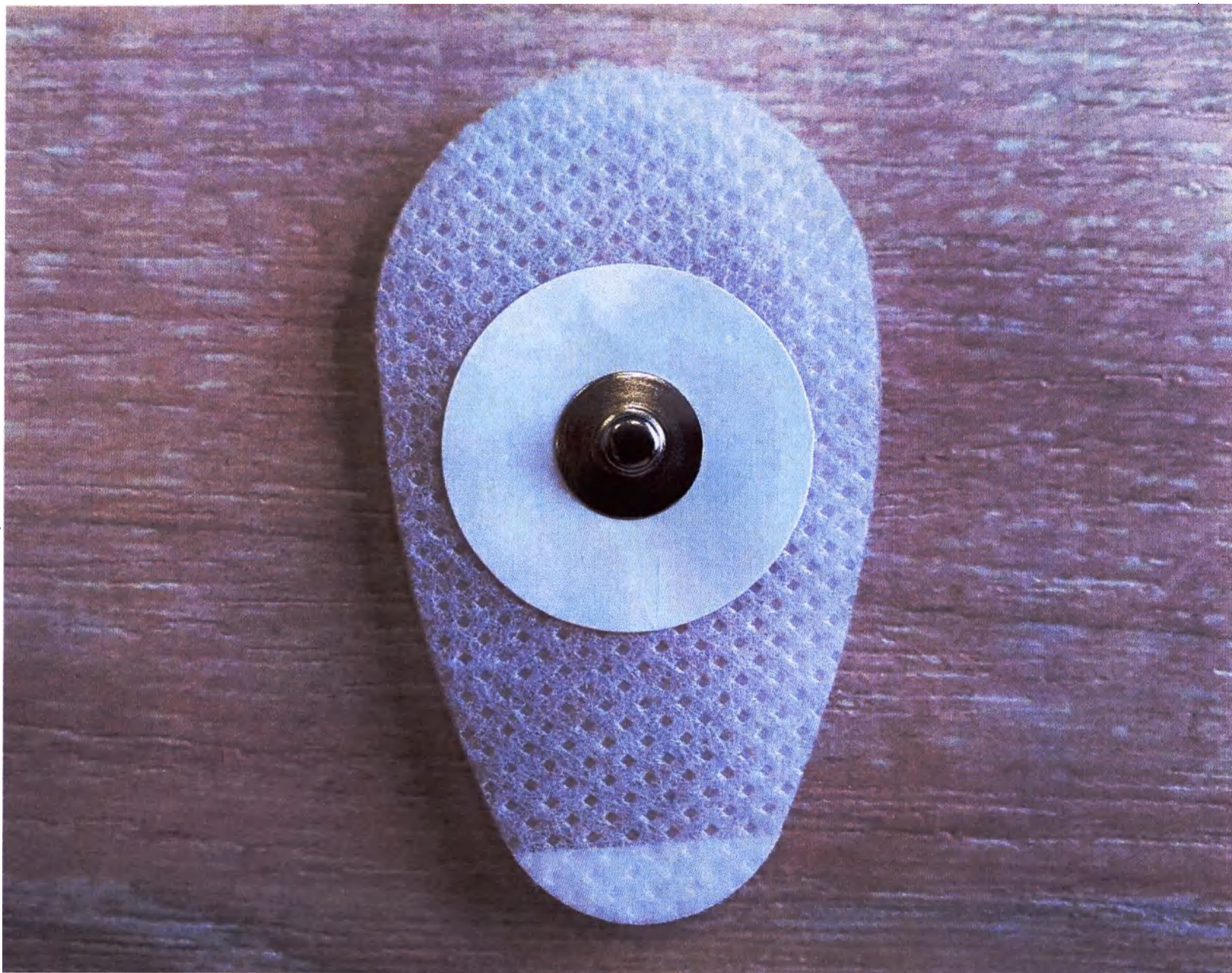


Электрод для электрокардиографии, одиоразовый, форма «слеза», из нетканого материала, взрослый, размер 57×34 мм

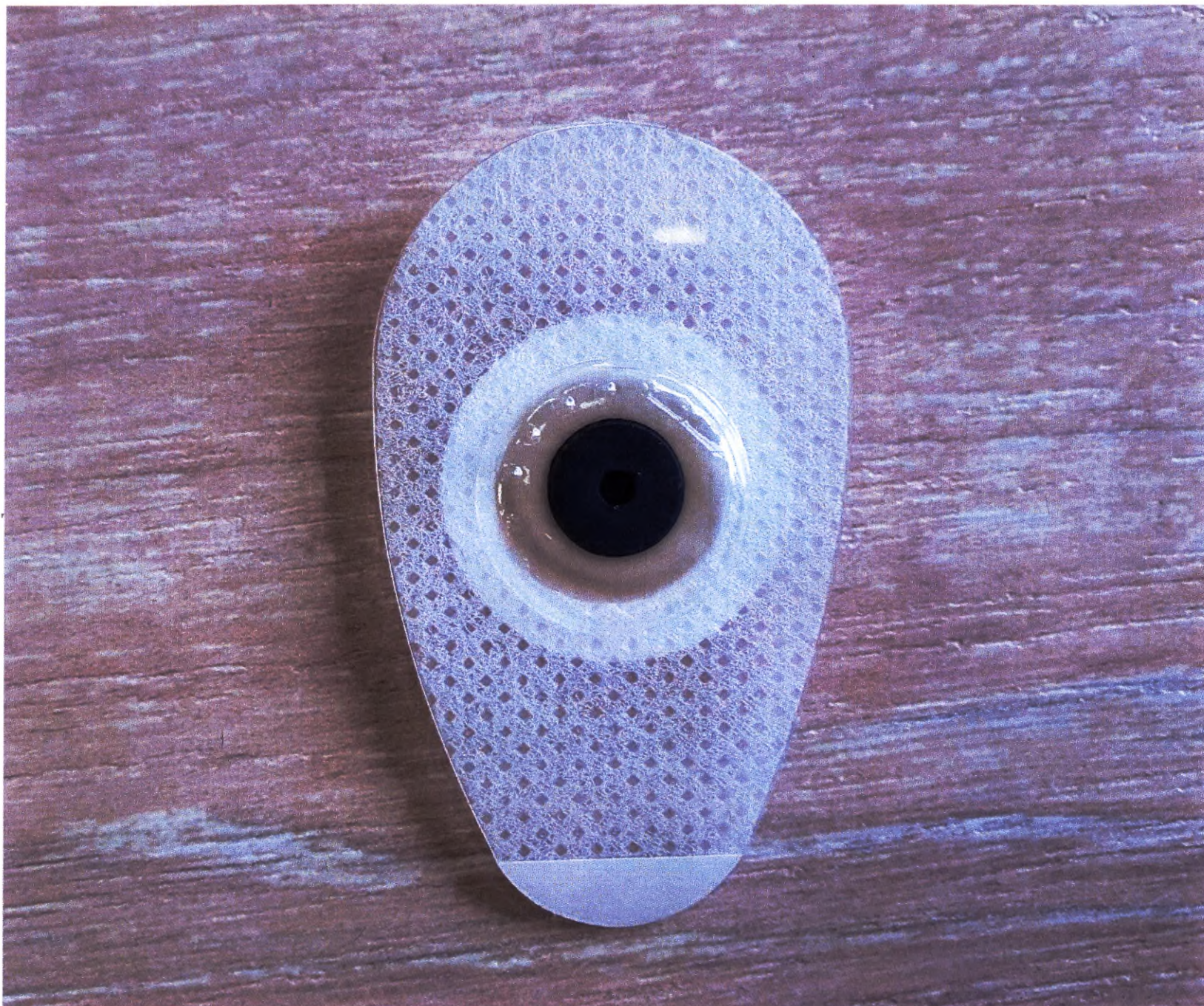


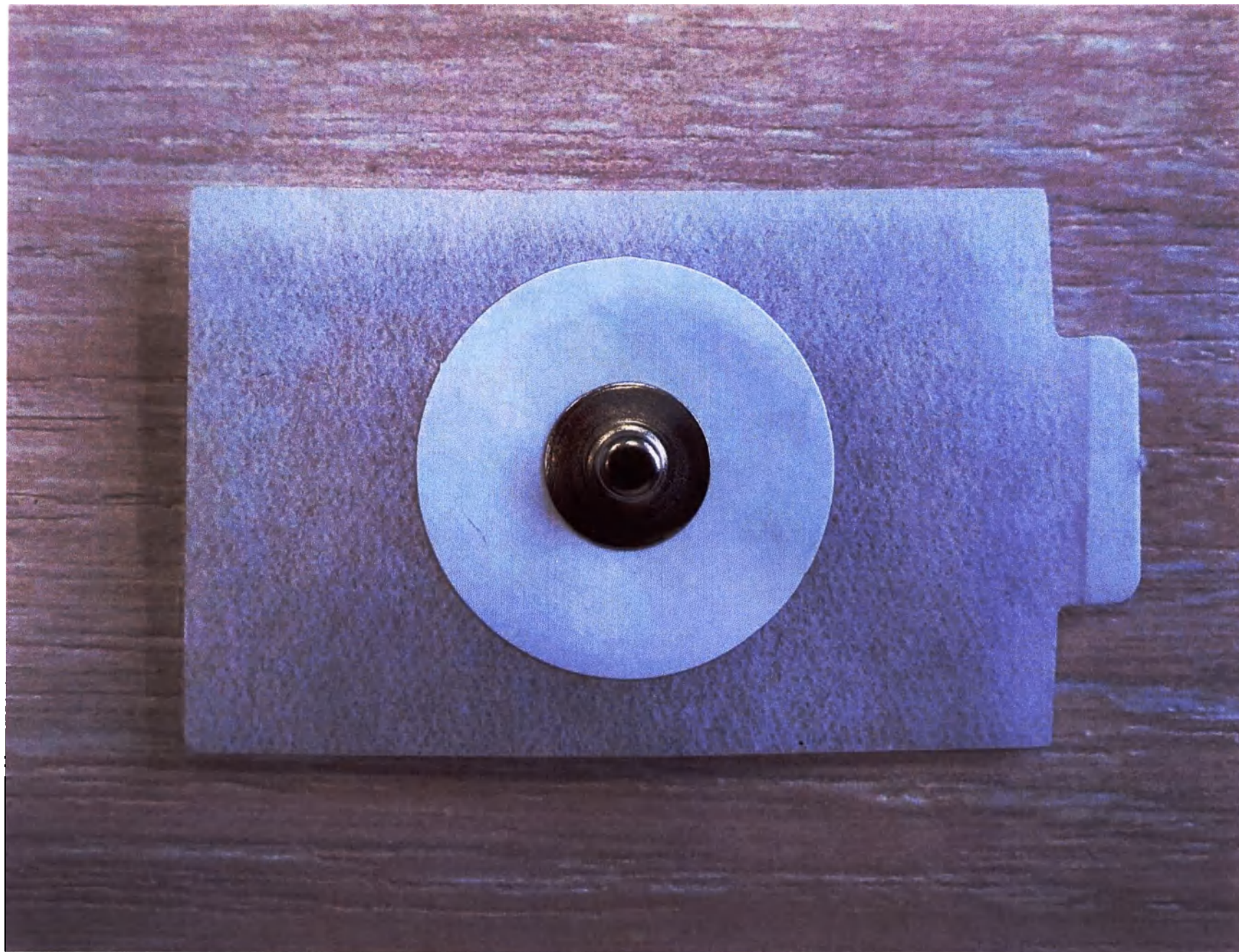


Электрод для электрокардиографии, одноразовый, прямоугольный, из вентилируемой бумаги, взрослый, размер 57×34 мм

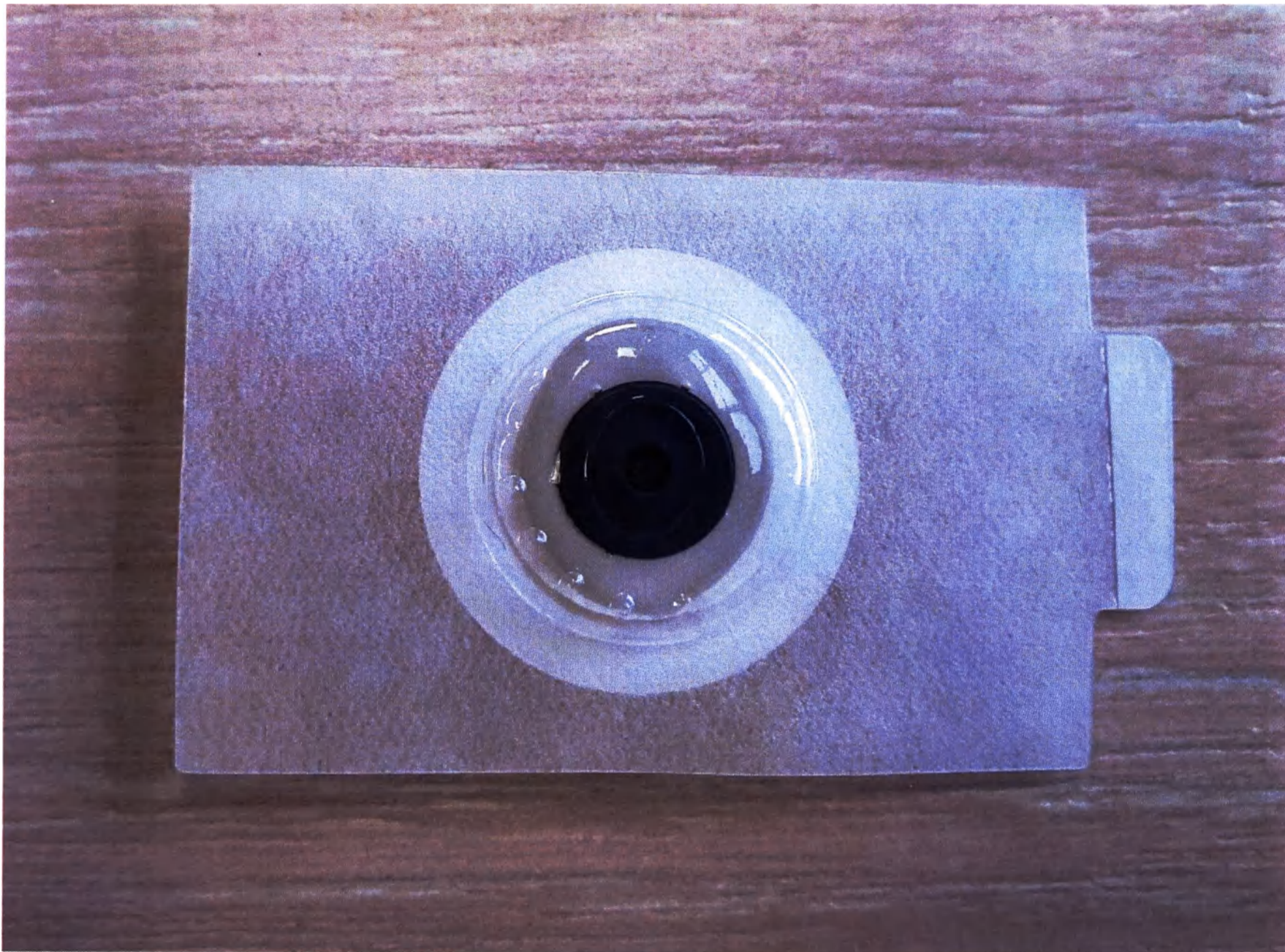



Электрод для электрокардиографии, одноразовый, прямоугольный, из вентилируемой бумаги, взрослый, размер 57×34 мм

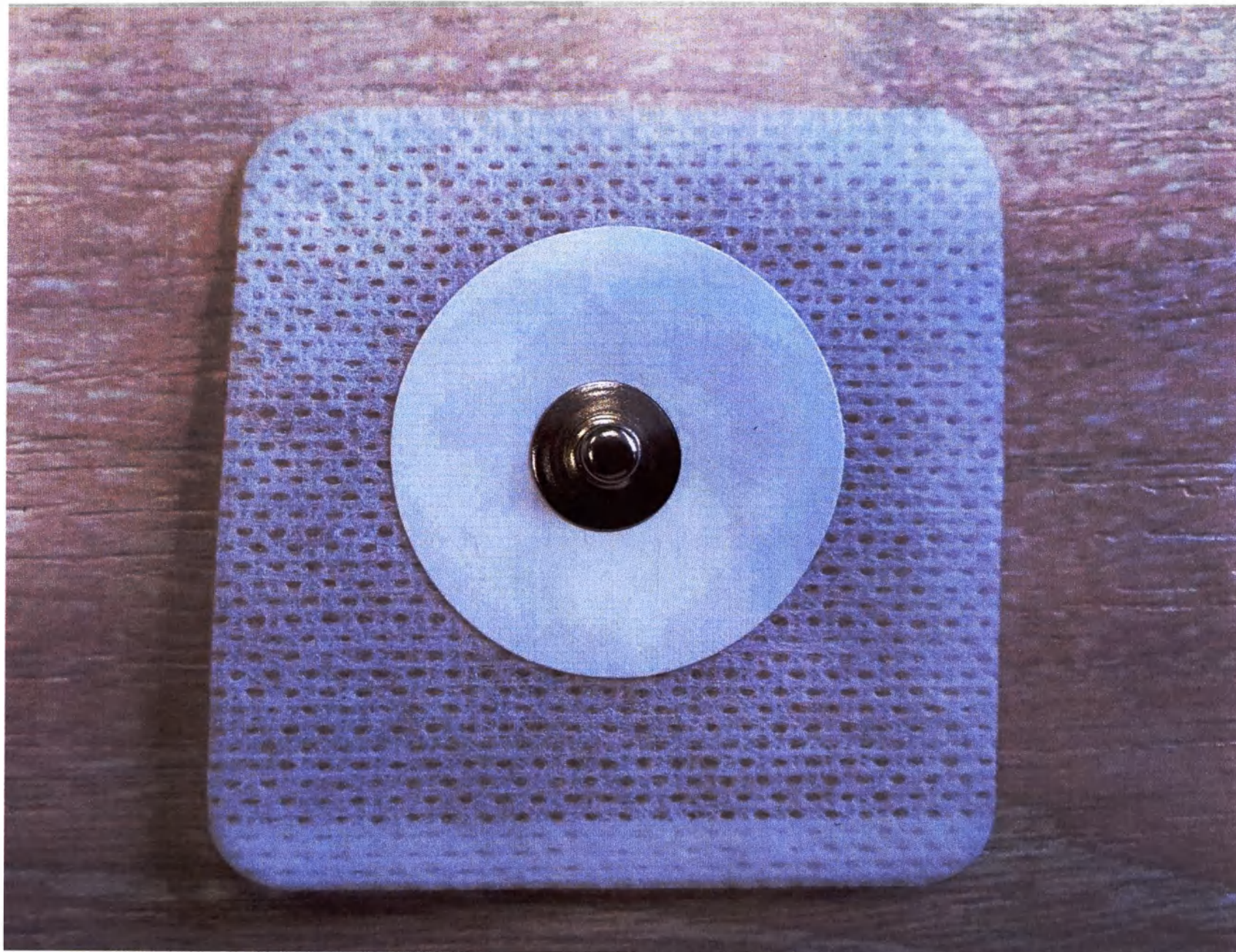


Электрод для электрокардиографии, одноразовый, прямоугольный, из спанлейса, взрослый, размер 52×52 мм

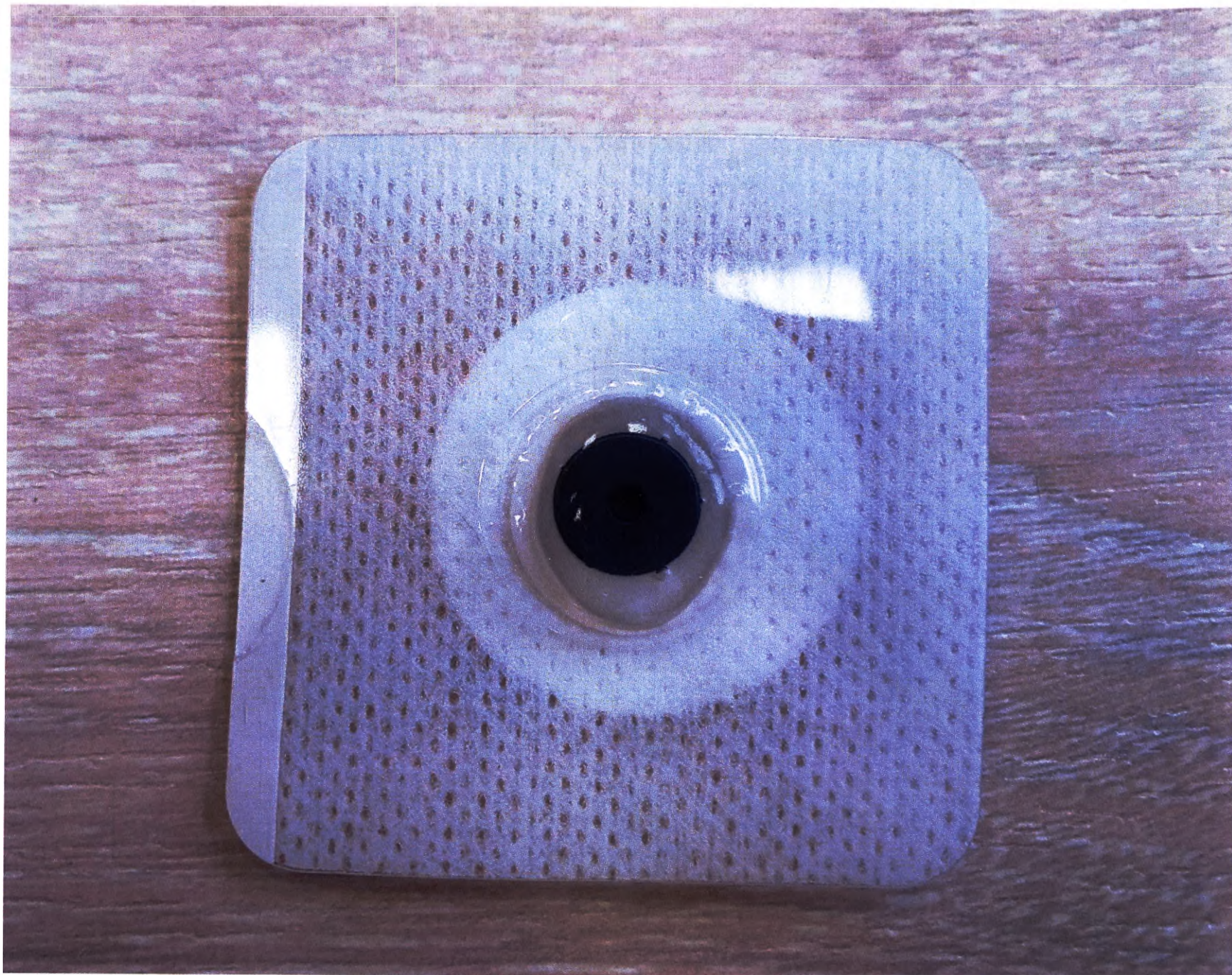

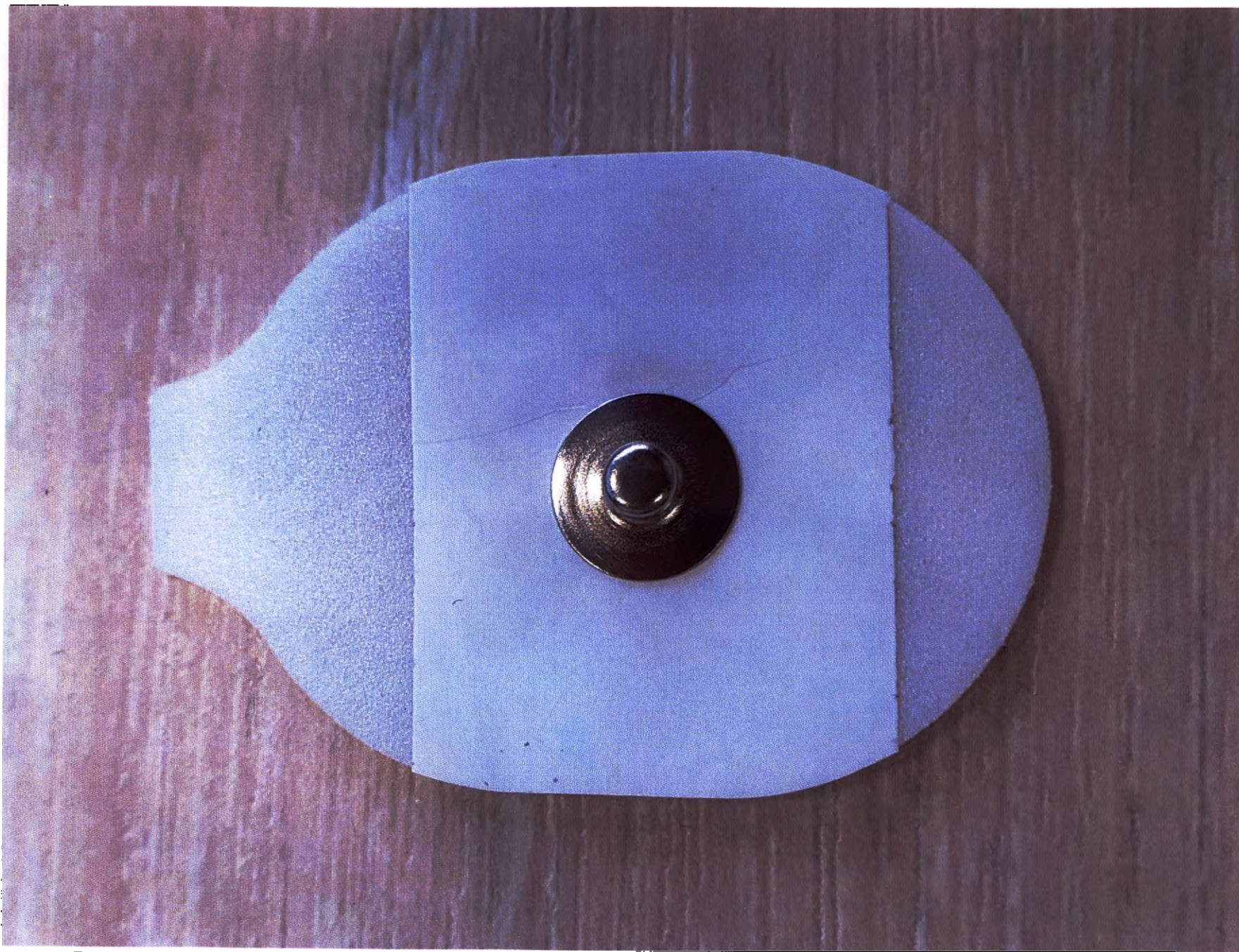


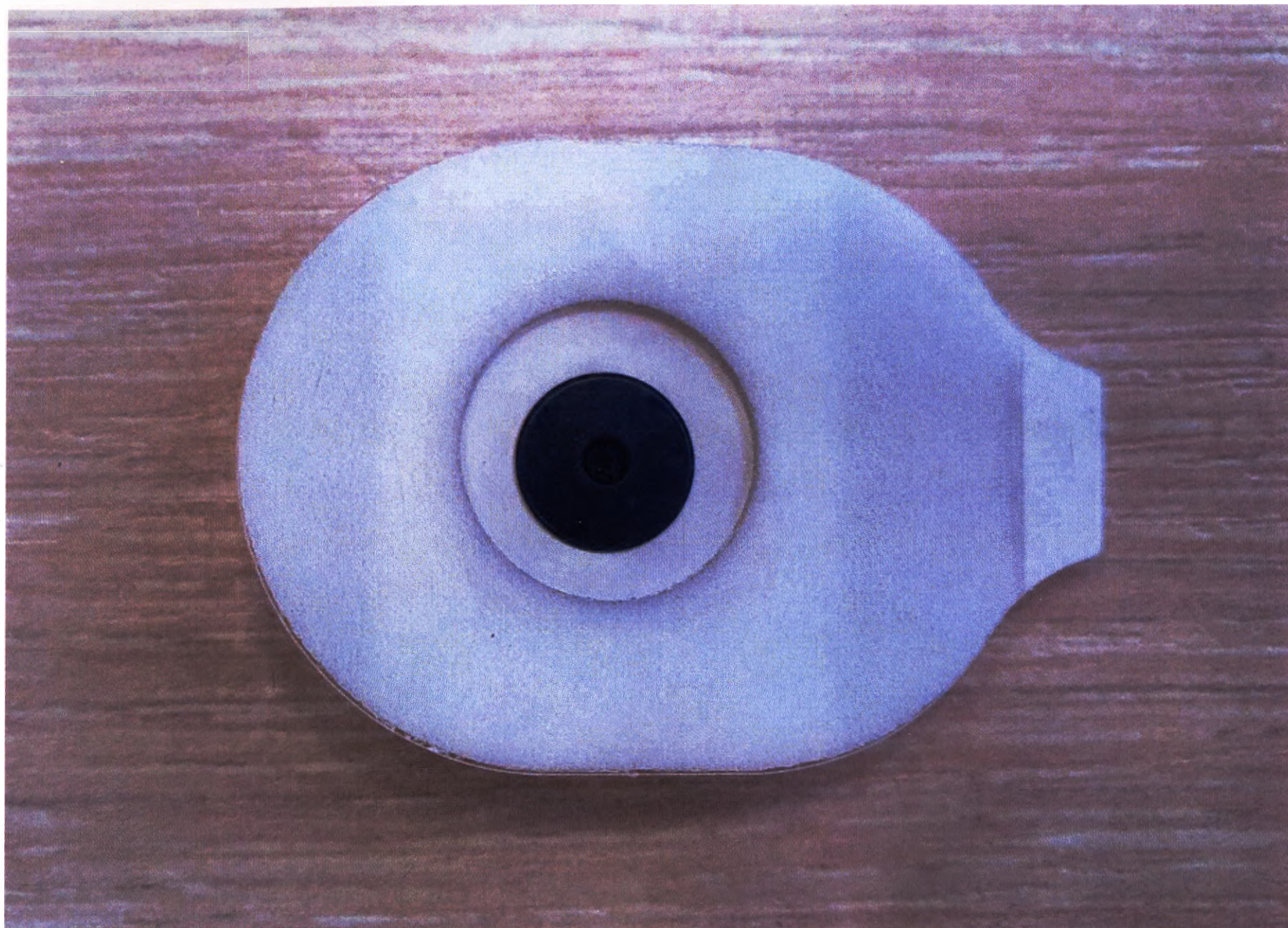

Электрод для электрокардиографии, одноразовый, овальный, из вспененного материала, взрослый, размер 48×34 мм

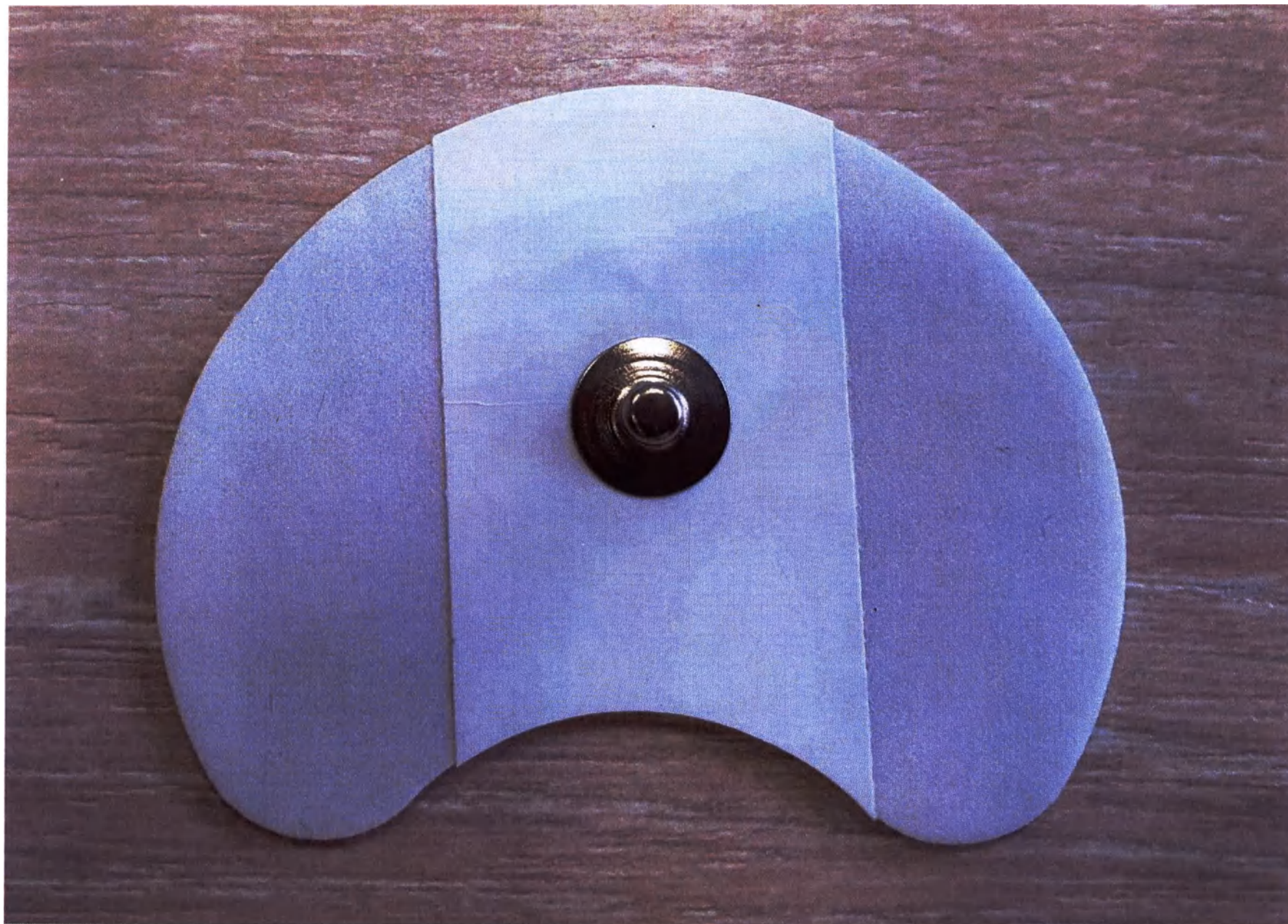

Электрод для электрокардиографии, одноразовый, форма «банан», из вспененного материала, взрослый, размер 40×60 мм

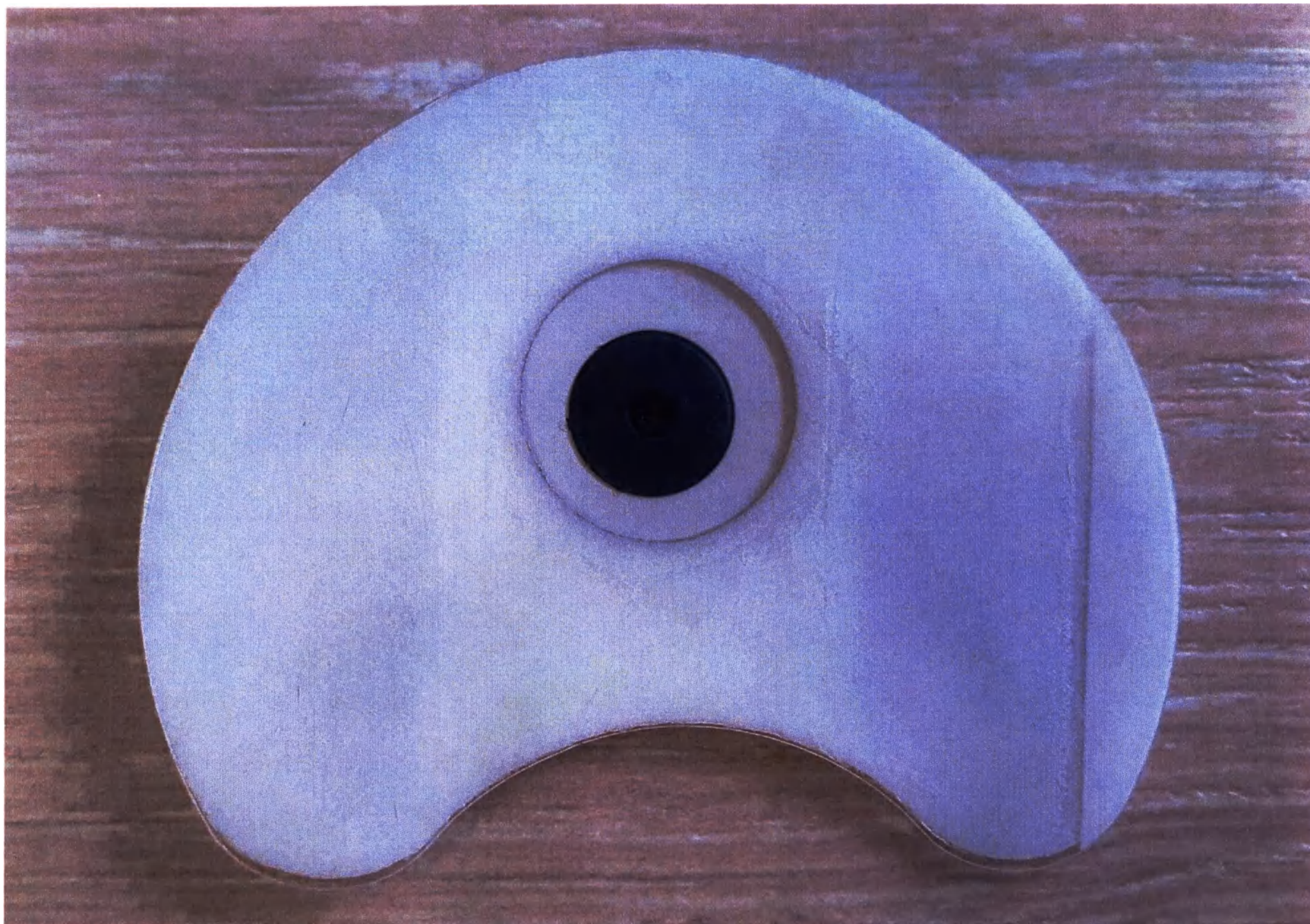

Электрод для электрокардиографии, одноразовый, форма «банан», из вспененного материала, взрослый, размер 40×60 мм



ОТКРЫТЬ



Shenfeng®

ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ ОДНОРАЗОВЫЙ

Вариант исполнения: ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ, ОДНОРАЗОВЫЙ,
ФОРМА "СПЕЗА", ИЗ НЕПЬЯНОГО МАТЕРИАЛА, ВЗРОСЛЫЙ

Размер: 55×50 мм

Датчик: Ag / AgCl

РУ № от

Кол-во: 30 шт/уп.

LOT

19042401

REF

932W5550



20.09.2021



19.09.2023



Производитель: Shanghai Shenfeng Medical & Health Articles Co., Ltd.

(ООО Шенфэн медицинско-здоровоохранительная, г. Шанхай), Китай.

No. 159, Pengling Road, (Except Building 2-1), Mafu, Jiading, 201801 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
+86-21-59106990

Уполномоченный представитель производителя:

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТМЕД»

111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 12, помещ. 1, комн. 27, тел. +7 (495) 780-74-88



Упаковка электрода для электрокардиографии, одноразового

ОТКРЫТЬ



ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ ОДНОРАЗОВЫЙ

Вариант исполнения: ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ, ОДНОРАЗОВЫЙ,
ФОРМА "БАНАН", ИЗ ИСПЕЧЕННОГО МАТЕРИАЛА, ВЗРОСЛЫЙ



Назначение: Медицинское изделие предназначено для передачи биоэлектрических сигналов сердца на устройства для сбора электрокардиосигнала организма, таких как самонастраивающийся электрокардиограф или электрокардиографический монитор.

Показания к применению: Регистрация электрического потенциала с поверхности кожи при различных обследованиях.

Противопоказания: Противопоказано пациентам с поврежденной кожей или шрамами.

Меры предосторожности, предупреждения:

1. При обследовании не следует тянуть за провод во избежание отсоединения провода или помехи сигналам.
2. Использовать с осторожностью у пациентов с чувствительной кожей.
3. После вскрытия тщательно закрыть упаковку во избежание высыхания электродов, открытую упаковку необходимо израсходовать в первую очередь.

Инструкция по использованию:

1. При необходимости протрите кожу перед обследованием для обеспечения оптимальной проводимости сигнала.
2. Соедините металлическую кнопку электрода с гнездом провода.
3. Отделите защитную пленку с рабочей части электрода.
4. Прикрепите электрод, соединенный с проводом, к обследуемому участку кожи пациента.
5. Использованное медицинское изделие подлежит утилизации в соответствии с местным законодательством и регламентами.

Характеристики электрического тока

Сопротивление переменного тока	75 Ω
Напряжение смещения постоянного тока	1.42 мВ
Собственный шум	0.285 мВ
Характеристики имитации дефибрилляции и восстановления	
Напряжение на паре электродов через 5 сек. после разряда	17.9 мВ
Среднее изменение за 30 сек.	0.335 мВ/с
Сопротивление переменного тока после имитации дефибрилляции	72 Ω
Допуск тока смещения	9.88 мВ

Условия хранения: Хранить в сухом, проветриваемом помещении при температуре от -5°C до 40°C, при влажности от 20% до 80%.

Срок годности: Срок годности медицинского изделия составляет 2 года.

Полная инструкция предоставляется по требованию на дискете или в бумажном виде.

Упаковка электрода для электрокардиографии, одноразового

Сшито и скреплено печатью

18 лист(а/ов).
Генеральный директор
ООО «ИНТМЕД»
Сюй Чжаоцзюнь

Место печати

(подпись)

27.12 2021 года

