

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО МПП «Гранд»



Андреев Э. Н.

20 25 г.

ОДЕЖДА МЕДИЦИНСКАЯ МНОГОРАЗОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ
по ТУ 14.12.30-001-24361398-2024

Инструкция по применению медицинского изделия

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция по применению распространяется на Одежда медицинская многоразовая нестерильная по ТУ 14.12.30-001-24361398-2024 (далее по тексту – «одежда», «медицинское изделие»).

Наименование. Одежда медицинская многоразовая нестерильная по ТУ 14.12.30-001-24361398-2024

Варианты исполнения:

1. Одежда медицинская многоразовая нестерильная №1, в составе:

- 1.1. Халат медицинский на завязках, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 – 1 шт;
- 1.2. Колпак медицинский на завязках, размер: 54, 56, 58, 60, 62 – 1 шт;
- 1.3. Фартук медицинский на завязках, размер: 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 (при необходимости) – 1 шт;
- 1.4. Бахилы медицинские на завязках (при необходимости) – 1 пара;
- 1.5. Инструкция по применению – 1 шт.

2. Одежда медицинская многоразовая нестерильная №2, в составе:

- 2.1. Халат медицинский мужской на застежке, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 – 1 шт;
- 2.2. Колпак медицинский на завязках, размер: 54, 56, 58, 60, 62 – 1 шт;
- 2.3. Инструкция по применению – 1 шт.

3. Одежда медицинская многоразовая нестерильная №3, в составе:

- 3.1. Халат медицинский женский на застежке, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 – 1 шт;
- 3.2. Колпак медицинский на завязках, размер: 54, 56, 58, 60, 62 – 1 шт;
- 3.3. Инструкция по применению – 1 шт.

4. Одежда медицинская многоразовая нестерильная №4, в составе:

- 4.1. Блуза медицинская мужская, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 – 1 шт;
- 4.2. Брюки медицинские мужские, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 – 1 шт;
- 4.3. Инструкция по применению – 1 шт.

5. Одежда медицинская многоразовая нестерильная №5, в составе:

5.1. Блуза медицинская женская, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 – 1 шт;

5.2. Брюки медицинские женские, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 – 1 шт;

5.3. Инструкция по применению – 1 шт.

6. Одежда медицинская многоразовая нестерильная №6, в составе:

6.1. Куртка медицинская, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 – 1 шт;

6.2. Брюки медицинские, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 – 1 шт;

6.3. Инструкция по применению – 1 шт.

7. Одежда медицинская многоразовая нестерильная №7, в составе:

7.1. Куртка медицинская, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 – 1 шт;

7.2. Брюки медицинские, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 – 1 шт;

7.3. Колпак медицинский на завязках, размер: 54, 56, 58, 60, 62 – 1 шт;

7.4. Халат медицинский на завязках, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 (при необходимости) – 1 шт;

7.5. Фартук медицинский на завязках, размер: 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 (при необходимости) – 1 шт;

7.6. Бахилы медицинские на завязках (при необходимости) – 1 пара;

7.7. Инструкция по применению – 1 шт.

Назначение. Медицинское изделие предназначено для использования персоналом медицинских учреждений во время приема пациентов и проведения лечебных процедур с целью предотвращения попадания и переноса возбудителей инфекций на поверхности тела и одежды.

Потенциальные потребители. Медицинский персонал любой квалификации.

Область применения. Хирургия, косметология, медицинская реабилитация, диагностика, педиатрия.

Показания к применению. Использование в качестве защитного барьера, предотвращающего попадание и перенос возбудителей инфекций на поверхности тела и одежды персонала медицинских учреждений во время приема пациентов и проведения лечебных процедур.

Противопоказания. Отсутствуют.

Возможные побочные эффекты применения. Аллергическая реакция на материалы в составе изделия, в случае возникновения – прекратить использование.

Классификация:

По потенциальному риску применения изделие относится к изделиям медицинского назначения класса 1 по ГОСТ 31508 и согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий».

Изделие в процессе эксплуатации устойчиво к климатическим воздействиям согласно исполнению УХЛ4.2 по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности 80% при температуре плюс 25 °С.

Изделия, упакованные в соответствии с требованиями технических условий, при хранении устойчивы к климатическим воздействиям для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности 80% при температуре плюс 25 °С.

Изделия, упакованные в соответствии с требованиями технических условий, при транспортировании устойчивы к климатическим воздействиям для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности 80% при температуре плюс 25 °С.

Медицинское изделие временно (менее 24 часов) контактирует с поверхностью неповрежденной кожи и относится к категории А по ГОСТ ISO 10993-1.

Вид медицинского изделия в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»: 104010 — «Костюм изолирующий».

Изделие является медицинским изделием многократного применения.

Изделие является нестерильным и не подлежит стерилизации.

Изделия после использования, намокания или загрязнения устойчивы к санитарно-гигиенической обработке согласно методу п.2.3 настоящей инструкции в течение 50 циклов в пределах срока годности.

Срок годности медицинского изделия составляет 2 года с даты изготовления.

1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Халат медицинский женский на застежке

1.1.1 Халат медицинский женский на застежке должен изготавливаться с застежкой спереди, с внешними передними боковыми карманами, с воротником. Рукава втачные, длинные, с манжетами. На уровне талии в боковом шве втачаны полупояса.

1.1.2 Параметры размеров халата медицинского женского на застежке соответствуют значениям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Параметры размеров халата медицинского женского на застежке

Наименование параметра	Рост, см	Полуобхват груди человека, см (размер)													Допускаемое отклонение
		36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82	84-86	
Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа	146-152	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	±1,0
	158-164	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	
	170-176	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	
	182-188	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
	194-200	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	
Ширина спинки в самом узком месте	146-152	37	39	41	43	45	48	51	54	57	60	63	66	69	±1,0
	158-164	37	39	41	43	45	48	51	54	57	60	63	66	69	
	170-176	37	39	41	43	45	48	51	54	57	60	63	66	69	
	182-188	37	39	41	43	45	48	51	54	57	60	63	66	69	
	194-200	37	39	41	43	45	48	51	54	57	60	63	66	69	
Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа	146-152	108	108	110	110	110	111	111	113	113	115	115	115	115	±1,0
	158-164	114	114	116	116	116	117	117	119	119	121	121	121	121	
	170-176	120	120	122	122	122	123	123	125	125	127	127	127	127	
	182-188	126	126	128	128	128	129	129	131	131	133	133	133	133	
	194-200	132	132	134	134	134	135	135	137	137	139	139	139	139	
Ширина полочки до края борта в самом узком месте	146-152	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	±1,0
	158-164	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	
	170-176	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	
	182-188	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	
	194-200	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	
Ширина халата на уровне глубины проймы	146-152	48,5	52,5	56,5	60,5	64,5	68,5	72,5	76,5	80,5	84,5	88,5	92,5	96,5	±2,0
	158-164	48,5	52,5	56,5	60,5	64,5	68,5	72,5	76,5	80,5	84,5	88,5	92,5	96,5	
	170-176	48,5	52,5	56,5	60,5	64,5	68,5	72,5	76,5	80,5	84,5	88,5	92,5	96,5	
	182-188	48,5	52,5	56,5	60,5	64,5	68,5	72,5	76,5	80,5	84,5	88,5	92,5	96,5	
	194-200	48,5	52,5	56,5	60,5	64,5	68,5	72,5	76,5	80,5	84,5	88,5	92,5	96,5	

Наименование параметра	Рост, см	Полуобхват груди человека, см (размер)												Допускаемое отклонение	
		36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82		84-86
Ширина халата внизу	146-152	56,5	60,5	64,5	68,5	72,5	77,5	82,5	88,5	94,5	101,5	108,5	116,5	124,5	±2,0
	158-164	56,5	60,5	64,5	68,5	72,5	77,5	82,5	88,5	94,5	101,5	108,5	116,5	124,5	
	170-176	56,5	60,5	64,5	68,5	72,5	77,5	82,5	88,5	94,5	101,5	108,5	116,5	124,5	
	182-188	56,5	60,5	64,5	68,5	72,5	77,5	82,5	88,5	94,5	101,5	108,5	116,5	124,5	
	194-200	56,5	60,5	64,5	68,5	72,5	77,5	82,5	88,5	94,5	101,5	108,5	116,5	124,5	
Длина рукава от высшей точки оката до низа	146-152	56	56	56	57	57	57	58	58	58	58	58	58	58	±1,0
	158-164	59	59	59	60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	
	170-176	62	62	62	63	63	63	64	64	64	64	64	64	64	
	182-188	65	65	65	66	66	66	67	67	67	67	67	67	67	
	194-200	68	68	68	69	69	69	70	70	70	70	70	70	70	
Ширина рукава под проймой	146-152	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	32	33,5	±1,0
	158-164	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	32	33,5	
	170-176	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	32	33,5	
	182-188	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	32	33,5	
	194-200	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	32	33,5	

1.1.3 Схема измерения параметров размеров халата медицинского женского на застежке представлена на рисунках 1 и 2.



1 – Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа; 2 – Ширина спинки в самом узком месте; 3 – Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа; 4 – Ширина полочки до края борта в самом узком месте; 5 – Ширина халата на уровне глубины проймы; 6 – Ширина халата внизу; 7 – Длина рукава от высшей точки оката до низа; 8 – Ширина рукава под проймой.

Рисунок 1 – Схема измерения параметров размеров халата медицинского женского на застежке, где в качестве застежки – пуговицы или кнопки



1 – Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа; 2 – Ширина спинки в самом узком месте; 3 – Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа; 4 – Ширина полочки до края борта в самом узком месте; 5 – Ширина халата на уровне глубины проймы; 6 – Ширина халата внизу; 7 – Длина рукава от высшей точки оката до низа; 8 – Ширина рукава под проймой.

Рисунок 2 – Схема измерения параметров размеров халата медицинского женского на застежке, где в качестве застежки – молния

1.1.4 Масса халата медицинского женского на застежке без упаковки составляет не более 400 г.

1.1.5 Халат медицинский женский снабжен застежкой согласно таблице 25.

1.1.6 Функциональные характеристики халата медицинского женского на застежке соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2 – Функциональные характеристики халата медицинского женского на застежке

Наименование параметра	Значение
Допустимая проницаемость микроорганизмами материалов и швов, %, не более	22
Чистота микробная, КОЕ/дм ² , менее	300
Прочность на разрыв в сухом состоянии, Н, не менее	20
Воздухопроницаемость, дм ³ /(м ² ·с), не менее	50

1.2 Халат медицинский мужской на застежке

1.2.1 Халат медицинский мужской на застежке должен изготавливаться с застежкой спереди, с внешними передними карманами, с воротником. Рукава одношовные втачные, длинные, с манжетами, застегивающимися на пуговицы или кнопки. На уровне талии в боковом шве втачаны полупояса.


1.2.2 Параметры размеров халата медицинского мужского на застежке соответствуют значениям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3 – Параметры размеров халата медицинского мужского на застежке

Наименование параметра	Рост, см	Полуобхват груди человека, см (размер)													Допускаемое отклонение
		36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82	84-86	
Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа	146-152	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	±1,0
	158-164	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	170-176	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	
	182-188	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	
	194-200	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	
Ширина спинки в самом узком месте	146-152	38	40	42	44	46	49	52	55	58	61	64	67	70	±1,0
	158-164	38	40	42	44	46	49	52	55	58	61	64	67	70	
	170-176	38	40	42	44	46	49	52	55	58	61	64	67	70	
	182-188	38	40	42	44	46	49	52	55	58	61	64	67	70	
	194-200	38	40	42	44	46	49	52	55	58	61	64	67	70	
Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа	146-152	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	±1,0
	158-164	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	
	170-176	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	
	182-188	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	
	194-200	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
Ширина полочки до края борта в самом узком месте	146-152	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	±1,0
	158-164	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	170-176	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	182-188	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	194-200	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
Ширина халата на уровне глубины проймы	146-152	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	±2,0
	158-164	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	
	170-176	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	
	182-188	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	
	194-200	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	

Наименование параметра	Рост, см	Полуобхват груди человека, см (размер)													Допускаемое отклонение
		36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82	84-86	
Ширина халата внизу	146-152	51,5	55,5	59,5	63,5	67,5	71,5	75,5	79,5	83,5	87,5	91,5	95,5	99,5	±1,0
	158-164	51,5	55,5	59,5	63,5	67,5	71,5	75,5	79,5	83,5	87,5	91,5	95,5	99,5	
	170-176	51,5	55,5	59,5	63,5	67,5	71,5	75,5	79,5	83,5	87,5	91,5	95,5	99,5	
	182-188	51,5	55,5	59,5	63,5	67,5	71,5	75,5	79,5	83,5	87,5	91,5	95,5	99,5	
	194-200	51,5	55,5	59,5	63,5	67,5	71,5	75,5	79,5	83,5	87,5	91,5	95,5	99,5	
Длина рукава от высшей точки оката до низа	146-152	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	±1,0
	158-164	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	
	170-176	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	
	182-188	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	
	194-200	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	
Ширина рукава под проймой	146-152	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	24	25,5	27	28,5	30	31,5	33	±1,0
	158-164	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	24	25,5	27	28,5	30	31,5	33	
	170-176	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	24	25,5	27	28,5	30	31,5	33	
	182-188	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	24	25,5	27	28,5	30	31,5	33	
	194-200	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	24	25,5	27	28,5	30	31,5	33	

1.2.3 Схема измерения параметров размеров халата медицинского мужского на застежках представлена на рисунке 3.

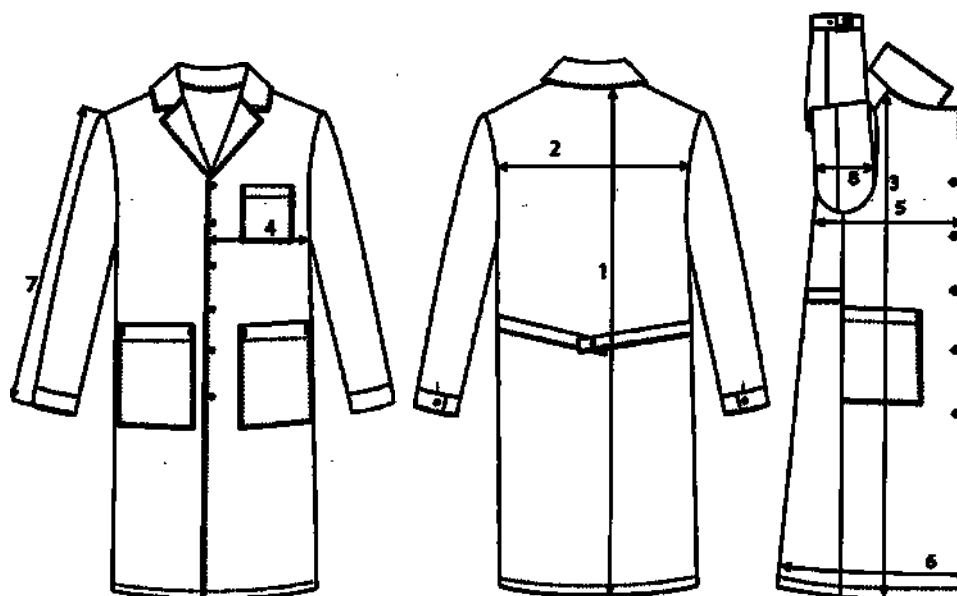

1 – Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа; 2 – Ширина спинки в самом узком месте; 3 – Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа; 4 – Ширина полочки до края борта в самом узком месте; 5 – Ширина халата на уровне глубины проймы; 6 – Ширина халата внизу; 7 – Длина рукава от высшей точки оката до низа; 8 – Ширина рукава под проймой

Рисунок 3 – Схема измерения параметров размеров халата медицинского мужского на застежке, где в качестве застежки – пуговицы или кнопки

1.2.4 Масса халата медицинского мужского на застежке без упаковки составляет не более 400 г.

1.2.5 Халат медицинский мужской снабжен застежкой согласно таблице 25.

1.2.6 Функциональные характеристики халата медицинского мужского на застежке соответствуют значениям, приведенным в таблице 4.

Таблица 4 – Функциональные характеристики халата медицинского мужского на застежке

Наименование параметра	Значение
Допустимая проницаемость микроорганизмами материалов и швов, %, не более	22
Чистота микробная, КОЕ/дм ² , менее	300
Прочность на разрыв в сухом состоянии, Н, не менее	20
Воздухопроницаемость, дм ³ /(м ² ·с), не менее	50

1.3 Халат медицинский на завязках

1.3.1 Халат медицинский на завязках должен изготавливаться на завязках сзади, без шва посередине переда, с внешними передним и боковыми карманами на полочках, без воротника. Рукава втачные, длинные, с манжетами на завязках.


1.3.2 Параметры размеров халата медицинского на завязках соответствуют значениям, приведенным в таблице 5.

Таблица 5 – Параметры размеров халата медицинского на завязках

Наименование параметра	Рост, см	Полуобхват груди человека, см (размер)													Допускаемое отклонение
		36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82	84-86	
Длина спинки	146-152	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	±1,0
	158-164	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	
	170-176	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	
	182-188	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	
	194-200	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	
Ширина переда в самом узком месте	146-152	39	41	43	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60	62,5	65	67,5	±0,5
	158-164	39	41	43	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60	62,5	65	67,5	
	170-176	39	41	43	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60	62,5	65	67,5	
	182-188	39	41	43	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60	62,5	65	67,5	
	194-200	39	41	43	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60	62,5	65	67,5	

Наименование параметра	Рост, см	Полуобхват груди человека, см (размер)													Допускаемое отклонение
		36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82	84-86	
Длина переда от угла плечевого шва и горловины до низа	146-152	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	±1,0
	158-164	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	
	170-176	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	
	182-188	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	
	194-200	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	
Ширина спинки между швами втачивания рукавов в самом узком месте	146-152	17,6	18,9	20,2	21,5	22,8	24,1	25,4	27	28,6	30,2	31,8	33,4	35	±0,5
	158-164	17,6	18,9	20,2	21,5	22,8	24,1	25,4	27	28,6	30,2	31,8	33,4	35	
	170-176	17,6	18,9	20,2	21,5	22,8	24,1	25,4	27	28,6	30,2	31,8	33,4	35	
	182-188	17,6	18,9	20,2	21,5	22,8	24,1	25,4	27	28,6	30,2	31,8	33,4	35	
	194-200	17,6	18,9	20,2	21,5	22,8	24,1	25,4	27	28,6	30,2	31,8	33,4	35	
Ширина халата на уровне глубины проймы	146-152	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	±2,0
	158-164	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	
	170-176	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	
	182-188	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	
	194-200	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	
Ширина халата внизу	146-152	51	54	57	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	±2,0
	158-164	51	54	57	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	
	170-176	51	54	57	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	
	182-188	51	54	57	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	
	194-200	51	54	57	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	
Длина рукава от высшей точки оката до низа	146-152	58	58	58	58	58	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	±1,0
	158-164	61	61	61	61	61	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	
	170-176	63	63	63	63	63	64,4	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	
	182-188	66	66	66	66	66	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	
	194-200	69	69	69	69	69	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	
Ширина рукава под проймой	146-152	20,5	22,0	23,5	25,0	26,5	28,0	29,5	31,0	32,5	34,0	35,5	37,0	38,5	±0,1
	158-164	20,5	22,0	23,5	25,0	26,5	28,0	29,5	31,0	32,5	34,0	35,5	37,0	38,5	
	170-176	20,5	22,0	23,5	25,0	26,5	28,0	29,5	31,0	32,5	34,0	35,5	37,0	38,5	
	182-188	20,5	22,0	23,5	25,0	26,5	28,0	29,5	31,0	32,5	34,0	35,5	37,0	38,5	
	194-200	20,5	22,0	23,5	25,0	26,5	28,0	29,5	31,0	32,5	34,0	35,5	37,0	38,5	

1.3.3 Схема измерения параметров размеров халата медицинского на завязках представлена на рисунке 4.

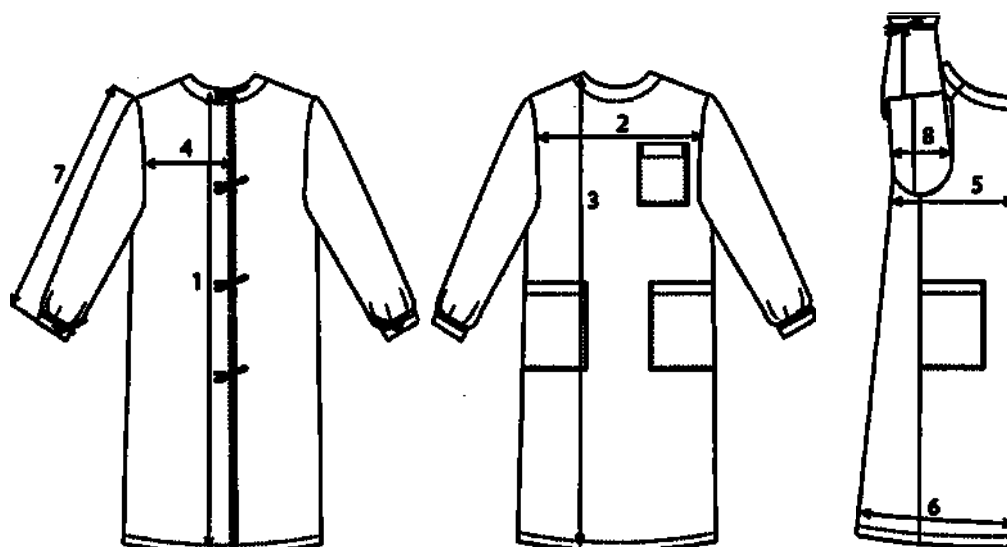

1 – Длина спинки; 2 – Ширина переда в самом узком месте; 3 – Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа; 4 – Ширина спинки до края борта в самом узком месте; 5 – Ширина халата на уровне глубины проймы; 6 – Ширина халата внизу; 7 – Длина рукава от высшей точки оката до низа; 8 – Ширина рукава под проймой

Рисунок 4 – Схема измерения параметров размеров халата медицинского на завязках

1.3.4 Масса халата медицинского на завязках без упаковки составляет не более 400 г.

1.3.5 Халат медицинский снабжен завязками в качестве средства фиксации.

1.3.6 Функциональные характеристики халата медицинского на завязках соответствуют значениям, приведенным в таблице 6.

Таблица 6 – Функциональные характеристики халата медицинского на завязках

Наименование параметра	Значение
Допустимая проницаемость микроорганизмами материалов и швов, %, не более	22
Чистота микробная, КОЕ/дм ² , менее	300
Прочность на разрыв в сухом состоянии, Н, не менее	20
Воздухопроницаемость, дм ³ /(м ² ·с), не менее	50

1.4 Куртка медицинская


1.4.1 Куртка медицинская изготавливается с V-образным вырезом горловины. На полочке три накладных кармана, с короткими рукавами. В боковых швах обработаны разрезы. Спинка цельная.

1.4.2 Параметры размеров куртки медицинской соответствуют значениям, приведенным в таблице 7.

Таблица 7 – Параметры размеров куртки медицинской

Наименование параметра	Рост, см	Полуобхват груди человека, см (размер)													Допускаемое отклонение
		36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82	84-86	
Длина спинки	146-152	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	±1,0
	158-164	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	
	170-176	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
	182-188	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
	194-200	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
Ширина куртки по низу	146-152	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	±2,0
	158-164	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	
	170-176	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	
	182-188	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	
	194-200	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	
Ширина куртки на уровне глубины проймы	146-152	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	±2,0
	158-164	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	
	170-176	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	
	182-188	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	
	194-200	45	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	
Длина рукава	146-152	26	26	26	27	27	27	28,5	28,5	28,5	30	30	30	30	±0,5
	158-164	26	26	26	27	27	27	28,5	28,5	28,5	30	30	30	30	
	170-176	26	26	26	27	27	27	28,5	28,5	28,5	30	30	30	30	
	182-188	26	26	26	27	27	27	28,5	28,5	28,5	30	30	30	30	
	194-200	26	26	26	27	27	27	28,5	28,5	28,5	30	30	30	30	

1.4.3 Схема измерения параметров размеров куртки медицинской представлена на рисунке 5.

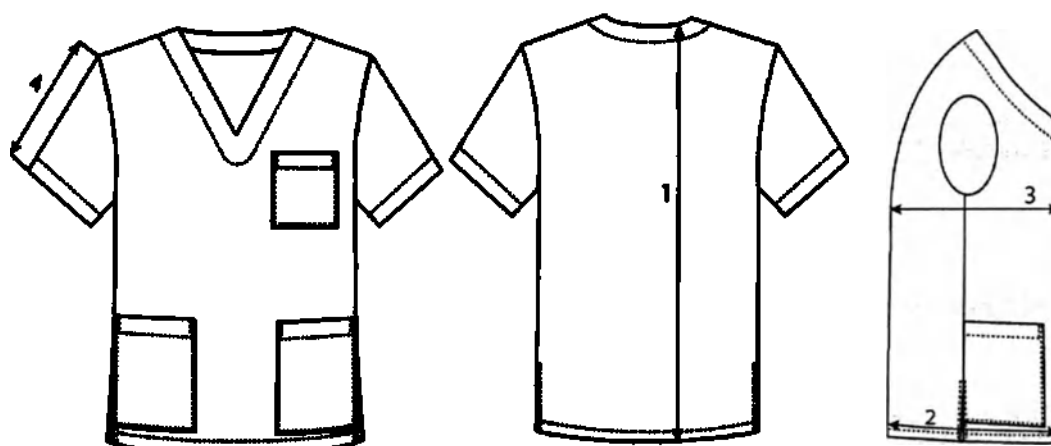

1 – Длина спинки; 2 – Ширина куртки по низу; 3 – Ширина куртки на уровне глубины проймы; 4 – Длина рукава

Рисунок 5 – Схема измерения параметров размеров куртки медицинской

1.4.4 Масса куртки медицинской без упаковки составляет не более 230 г.

1.4.5 Функциональные характеристики куртки медицинской соответствуют значениям, приведенным в таблице 8.

Таблица 8 – Функциональные характеристики куртки медицинской

Наименование параметра	Значение
Допустимая проницаемость микроорганизмами материалов и швов, %, не более	22
Чистота микробная, КОЕ/дм ² , менее	300
Прочность на разрыв в сухом состоянии, Н, не менее	20
Воздухопроницаемость, дм ³ /(м ² ·с), не менее	50

1.5 Блуза медицинская женская

1.5.1 Блуза медицинская женская должна изготавливаться с центральной бортовой застежкой, с втачными рукавами, с воротником. Полочка с рельефами от плечевого шва, с двумя накладными нижними карманами и с одним нагрудным карманом. Спинка цельная. На уровне талии в боковом шве втачаны полупояса.


1.5.2 Параметры размеров блузы медицинской женской соответствуют значениям, приведенным в таблице 9.

Таблица 9 – Параметры размеров блузы медицинской женской

Наименование параметра	Рост, см	Полуобхват груди человека, см (размер)													Допускаемое отклонение
		36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82	84-86	
Длина спинки по середине от шва втачивания воротника до низа	146-152	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	±1,0
	158-164	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
	170-176	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
	182-188	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
Ширина спинки в самом узком месте	146-152	37	39	41	43	45	48	51	54	57	60	63	66	69	±1,0
	158-164	37	39	41	43	45	48	51	54	57	60	63	66	69	
	170-176	37	39	41	43	45	48	51	54	57	60	63	66	69	
	182-188	37	39	41	43	45	48	51	54	57	60	63	66	69	
Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа	146-152	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	±1,0
	158-164	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	170-176	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	
	182-188	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	
Ширина полочки до края борта в самом узком месте	146-152	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	±1,0
	158-164	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	
	170-176	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	


Наименование параметра	Рост, см	Полуобхват груди человека, см (размер)													Допускаемое отклонение
		36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82	84-86	
		182-188	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5
Ширина блузы на уровне глубины проймы	146-152	48,5	52,5	56,5	60,5	64,5	68,5	72,5	76,5	80,5	84,5	88,5	92,5	96,5	±2,0
	158-164	48,5	52,5	56,5	60,5	64,5	68,5	72,5	76,5	80,5	84,5	88,5	92,5	96,5	
	170-176	48,5	52,5	56,5	60,5	64,5	68,5	72,5	76,5	80,5	84,5	88,5	92,5	96,5	
	182-188	48,5	52,5	56,5	60,5	64,5	68,5	72,5	76,5	80,5	84,5	88,5	92,5	96,5	
Ширина блузы внизу	146-152	53	57	61	65	69	74	79	85	91	98	105	113	121	±2,0
	158-164	53	57	61	65	69	74	79	85	91	98	105	113	121	
	170-176	53	57	61	65	69	74	79	85	91	98	105	113	121	
	182-188	53	57	61	65	69	74	79	85	91	98	105	113	121	
Длина рукава от высшей точки оката до низа	146-152	40,5	40,5	40,5	41,2	41,2	41,2	42	42	42	42	42	42	42	±1,0
	158-164	43,5	43,5	43,5	44,2	44,2	44,2	45	45	45	45	45	45	45	
	170-176	46,5	46,5	46,5	47,2	47,2	47,2	48	48	48	48	48	48	48	
	182-188	49,5	49,5	49,5	50,2	50,2	50,2	51	51	51	51	51	51	51	
Ширина рукава под проймой	146-152	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	32	33,5	±1,0
	158-164	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	32	33,5	
	170-176	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	32	33,5	
	182-188	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	32	33,5	

1.5.3 Схема измерения параметров размеров блузы медицинской женской представлена на рисунках 6 и 7.

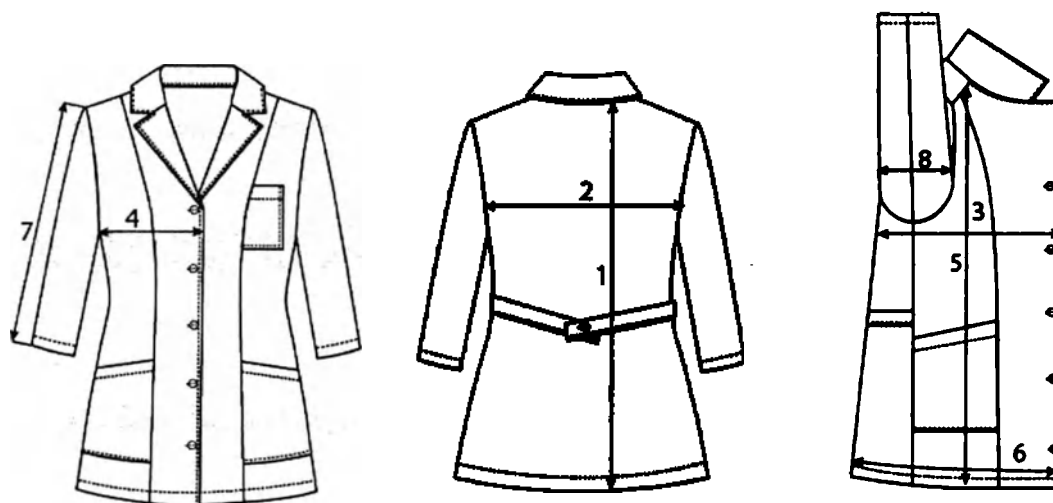

1 – Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа; 2 – Ширина спинки в самом узком месте; 3 – Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа; 4 – Ширина полочки до края борта в самом узком месте; 5 – Ширина блузы на уровне глубины проймы; 6 – Ширина блузы внизу; 7 – Длина рукава от высшей точки оката до низа; 8 – Ширина рукава под проймой.

Рисунок 6 – Схема измерения параметров размеров блузы медицинской женской, где в качестве застежки – пуговицы или кнопки

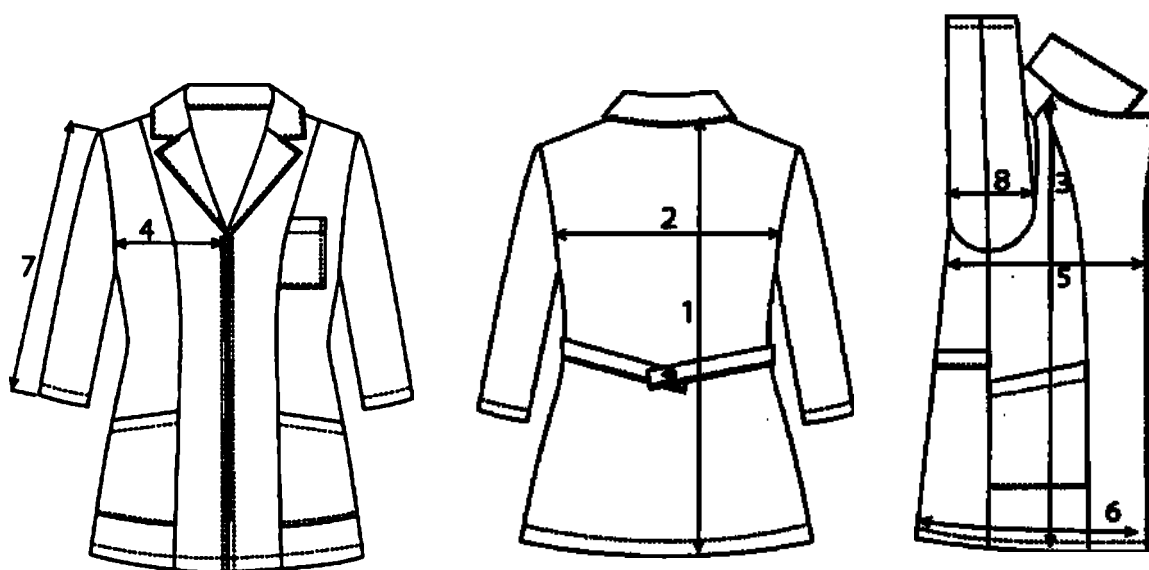

1 – Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа; 2 – Ширина спинки в самом узком месте; 3 – Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа; 4 – Ширина полочки до края борта в самом узком месте; 5 – Ширина блузы на уровне глубины проймы; 6 – Ширина блузы внизу; 7 – Длина рукава от высшей точки оката до низа; 8 – Ширина рукава под проймой.

Рисунок 7 – Схема измерения параметров размеров блузы медицинской женской, где в качестве застежки – молния

1.5.4 Масса блузы медицинской женской без упаковки составляет не более 230 г.

1.5.5 Блуза медицинская женская снабжена застежкой согласно таблице 25.

1.5.6 Функциональные характеристики блузы медицинской женской соответствуют значениям, приведенным в таблице 10.

Таблица 10 – Функциональные характеристики блузы медицинской женской

Наименование параметра	Значение
Допустимая проницаемость микроорганизмами материалов и швов, %, не более	22
Чистота микробная, КОЕ/дм ² , менее	300
Прочность на разрыв в сухом состоянии, Н, не менее	20
Воздухопроницаемость, дм ³ /(м ² ·с), не менее	50

1.6 Блуза медицинская мужская


1.6.1 Блуза медицинская мужская должна изготавливаться с центральной бортовой застежкой, с втачными рукавами, с воротником. Полочка цельная с двумя нижними накладными карманами и с одним нагрудным карманом. Спинка цельная. На уровне талии в боковом шве втачаны полупояса.

1.6.2 Параметры размеров блузы медицинской мужской соответствуют значениям, приведенным в таблице 11.

Таблица 11 – Параметры размеров блузы медицинской мужской

Наименование параметра	Рост, см	Полуобхват груди человека, см (размер)													Допускаемое отклонение
		36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82	84-86	
Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа	146-152	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	±1,0
	158-164	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	
	170-176	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
	182-188	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	
Ширина спинки в самом узком месте	146-152	38	40	42	44	46	49	52	55	58	61	64	67	70	±1,0
	158-164	38	40	42	44	46	49	52	55	58	61	64	67	70	
	170-176	38	40	42	44	46	49	52	55	58	61	64	67	70	
	182-188	38	40	42	44	46	49	52	55	58	61	64	67	70	
Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа	146-152	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	±1,0
	158-164	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	
	170-176	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
	182-188	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	
Ширина полочки до края борта в самом узком месте	146-152	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	±1,0
	158-164	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	170-176	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	182-188	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
Ширина блузы на уровне глубины проймы	146-152	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	±2,0
	158-164	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	
	170-176	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	
	182-188	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	
Ширина блузы внизу	146-152	51,5	55,5	59,5	63,5	67,5	71,5	75,5	79,5	83,5	87,5	91,5	95,5	99,5	±2,0
	158-164	51,5	55,5	59,5	63,5	67,5	71,5	75,5	79,5	83,5	87,5	91,5	95,5	99,5	
	170-176	51,5	55,5	59,5	63,5	67,5	71,5	75,5	79,5	83,5	87,5	91,5	95,5	99,5	
	182-188	51,5	55,5	59,5	63,5	67,5	71,5	75,5	79,5	83,5	87,5	91,5	95,5	99,5	
Длина рукава от высшей точки оката до низа	146-152	25	25	25	27	27	27	30	30	30	32	32	32	32	±1,0
	158-164	25	25	25	27	27	27	30	30	30	32	32	32	32	
	170-176	25	25	25	27	27	27	30	30	30	32	32	32	32	
	182-188	25	25	25	27	27	27	30	30	30	32	32	32	32	
Ширина рукава под проймой	146-152	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	24	25,5	27	28,5	30	31,5	33	±1,0
	158-164	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	24	25,5	27	28,5	30	31,5	33	
	170-176	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	24	25,5	27	28,5	30	31,5	33	
	182-188	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	24	25,5	27	28,5	30	31,5	33	

1.6.3 Схема измерения параметров размеров блузы медицинской мужской представлена на рисунке 6.

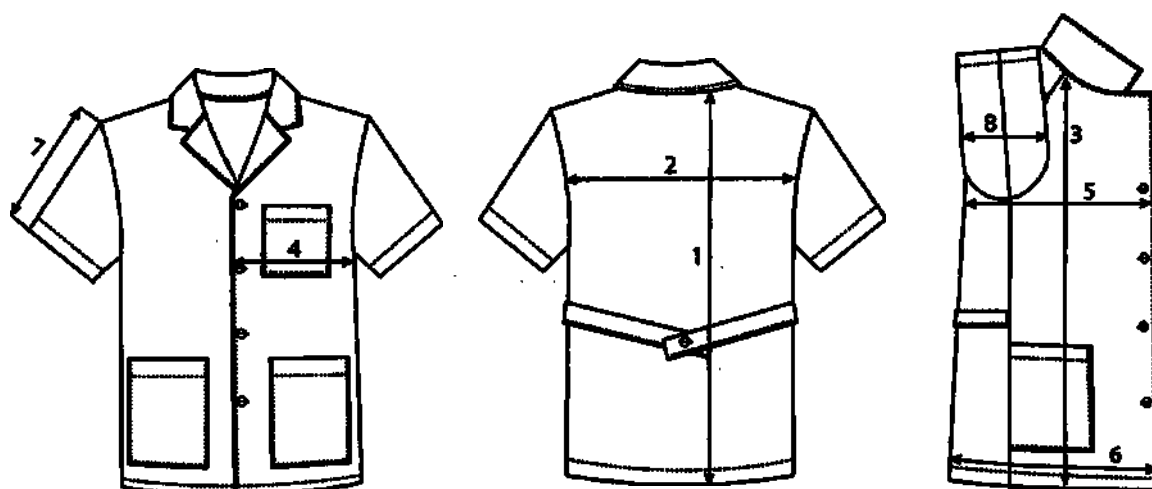

1 – Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа; 2 – Ширина спинки в самом узком месте; 3 – Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа; 4 – Ширина полочки до края борта в самом узком месте; 5 – Ширина блузы на уровне глубины проймы; 6 – Ширина блузы внизу; 7 – Длина рукава от высшей точки оката до низа; 8 – Ширина рукава под проймой

Рисунок 8 – Схема измерения параметров размеров блузы медицинской мужской, где в качестве застежки – пуговицы или кнопки

1.6.4 Масса блузы медицинской мужской без упаковки составляет не более 230 г.

1.6.5 Блуза медицинская мужская снабжена застежкой согласно таблице 25.

1.6.6 Функциональные характеристики блузы медицинской мужской соответствуют значениям, приведенным в таблице 12.

Таблица 12 – Функциональные характеристики блузы медицинской мужской

Наименование параметра	Значение
Допустимая проницаемость микроорганизмами материалов и швов, %, не более	22
Чистота микробная, КОЕ/дм ² , менее	300
Прочность на разрыв в сухом состоянии, Н, не менее	20
Воздухопроницаемость, дм ³ /(м ² ·с), не менее	50

1.7 Брюки медицинские женские


1.7.1 Брюки медицинские женские изготавливаются прямого силуэта с резинкой на поясе.

1.7.2 Параметры размеров брюк медицинских женских соответствуют значениям, приведенным в таблице 13.

Таблица 13 – Параметры размеров брюк медицинских женских

Наименование параметра	Рост, см	Полуобхват бедер человека, см (размер)													Допускаемое отклонение
		36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82	84-86	
Длина по боковому шву	146-152	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	±2,0
	158-164	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	
	170-176	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	
	182-188	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
	194-200	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	
Ширина пояса	146-152	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	±1,0
	158-164	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
	170-176	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
	182-188	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
	194-200	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Обхват бедер	146-152	47	51	54	59	63	68	73	78	83	88	93	98	103	±2,0
	158-164	47	51	54	59	63	68	73	78	83	88	93	98	103	
	170-176	47	51	54	59	63	68	73	78	83	88	93	98	103	
	182-188	47	51	54	59	63	68	73	78	83	88	93	98	103	
	194-200	47	51	54	59	63	68	73	78	83	88	93	98	103	

1.7.3 Схема измерения параметров размеров брюк медицинских женских представлена на рисунке 9.

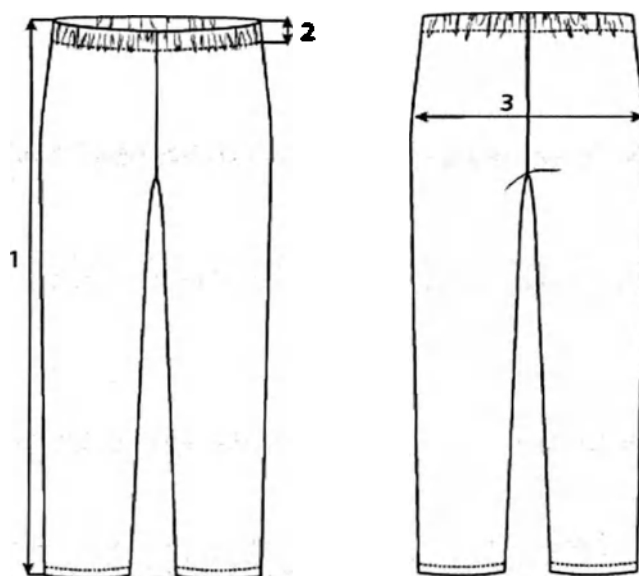

1 – Длина по боковому шву; 2 – Ширина пояса; 3 – Обхват бедер.

Рисунок 9 – Схема измерения параметров размеров брюк медицинских женских

1.7.4 Масса брюк медицинских женских без упаковки составляет не более 200 г.

1.7.5 Брюки медицинские женские снабжены резинкой на поясе в качестве средства фиксации.

1.7.6 Функциональные характеристики брюк медицинских женских соответствуют значениям, приведенным в таблице 14.

Таблица 14 – Функциональные характеристики брюк медицинских женских

Наименование параметра	Значение
Допустимая проницаемость микроорганизмами материалов и швов, %, не более	22
Чистота микробная, КОЕ/дм ² , менее	300
Прочность на разрыв в сухом состоянии, Н, не менее	20
Воздухопроницаемость, дм ³ /(м ² ·с), не менее	50

1.8 Брюки медицинские мужские


1.8.1 Брюки медицинские мужские изготавливаются прямого силуэта с резинкой на поясе.

1.8.2 Параметры размеров брюк медицинских мужских соответствуют значениям, приведенным в таблице 15.

Таблица 15 – Параметры размеров брюк медицинских мужских

Наименование параметра	Рост, см	Полуобхват бедер человека, см (размер)													Допускаемое отклонение
		36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82	84-86	
Длина по боковому шву	146-152	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	±2,0
	158-164	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	
	170-176	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	
	182-188	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	
	194-200	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	
Ширина пояса	146-152	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	±1,0
	158-164	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
	170-176	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
	182-188	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
	194-200	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Обхват бедер	146-152	43	47	51	55	59	64	69	74	79	84	89	94	99	±2,0
	158-164	43	47	51	55	59	64	69	74	79	84	89	94	99	
	170-176	43	47	51	55	59	64	69	74	79	84	89	94	99	
	182-188	43	47	51	55	59	64	69	74	79	84	89	94	99	
	194-200	43	47	51	55	59	64	69	74	79	84	89	94	99	

1.8.3 Схема измерения параметров размеров брюк медицинских мужских представлена на рисунке 10.

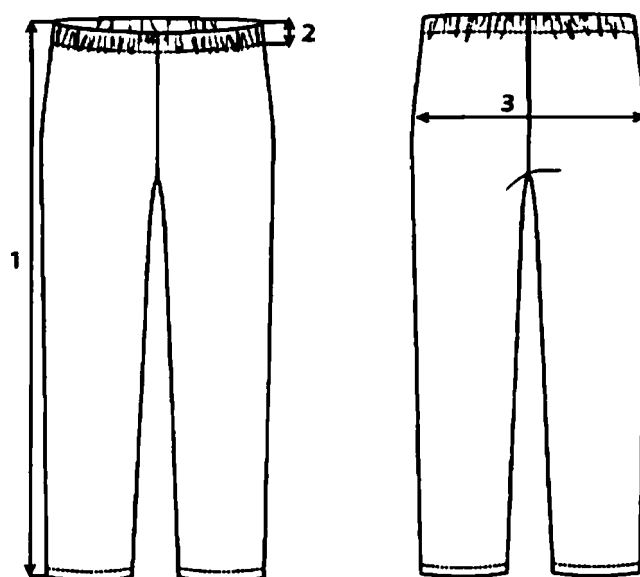

1 – Длина по боковому шву; 2 – Ширина пояса; 3 – Обхват бедер.

Рисунок 10 – Схема измерения параметров размеров брюк медицинских мужских

1.8.4 Масса брюк медицинских мужских без упаковки составляет не более 200 г.

1.8.5 Брюки медицинские мужские снабжены резинкой на поясе в качестве средства фиксации.

1.8.6 Функциональные характеристики брюк медицинских мужских соответствуют значениям, приведенным в таблице 16.

Таблица 16 – Функциональные характеристики брюк медицинских мужских

Наименование параметра	Значение
Допустимая проницаемость микроорганизмами материалов и швов, %, не более	22
Чистота микробная, КОЕ/дм ² , менее	300
Прочность на разрыв в сухом состоянии, Н, не менее	20
Воздухопроницаемость, дм ³ /(м ² ·с), не менее	50

1.9 Брюки медицинские


1.9.1 Брюки медицинские изготавливаются прямого силуэта с резинкой на поясе.

1.9.2 Параметры размеров брюк медицинских соответствуют значениям, приведенным в таблице 17.

Таблица 17 – Параметры размеров брюк медицинских

Наименование параметра	Рост, см	Полуобхват бедер человека, см (размер)													Допускаемое отклонение
		36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82	84-86	
Длина по боковому шву	146-152	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	±2,0
	158-164	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	
	170-176	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	
	182-188	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
	194-200	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	
Ширина пояса	146-152	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	±1,0
	158-164	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
	170-176	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
	182-188	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
	194-200	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Обхват бедер	146-152	46	50	53	58	62	67	72	77	82	87	92	97	102	±2,0
	158-164	46	50	53	58	62	67	72	77	82	87	92	97	102	
	170-176	46	50	53	58	62	67	72	77	82	87	92	97	102	
	182-188	46	50	53	58	62	67	72	77	82	87	92	97	102	
	194-200	46	50	53	58	62	67	72	77	82	87	92	97	102	

1.9.3 Схема измерения параметров размеров брюк медицинских представлена на рисунке 11.

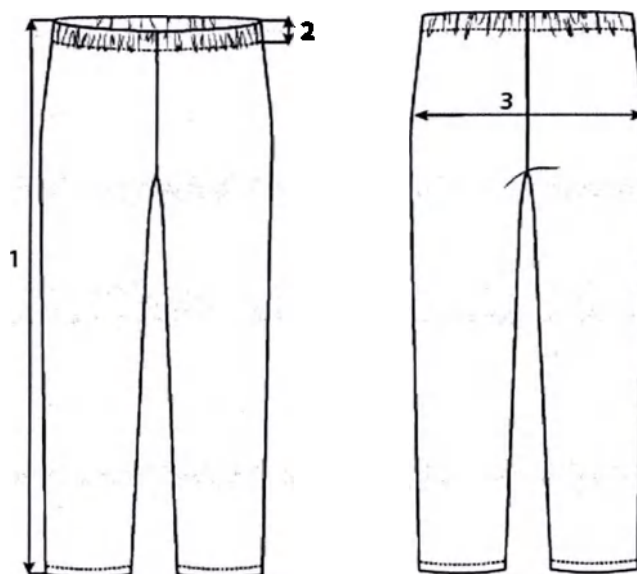

1 – Длина по боковому шву; 2 – Ширина пояса; 3 – Обхват бедер.

Рисунок 11 – Схема измерения параметров размеров брюк медицинских

1.9.4 Масса брюк медицинских без упаковки составляет не более 200 г.

1.9.5 Брюки медицинские снабжены резинкой на поясе в качестве средства фиксации.

1.9.6 Функциональные характеристики брюк медицинских соответствуют значениям, приведенным в таблице 18.

Таблица 18 – Функциональные характеристики брюк медицинских мужских

Наименование параметра	Значение
Допустимая проницаемость микроорганизмами материалов и швов, %, не более	22
Чистота микробная, КОЕ/дм ² , менее	300
Прочность на разрыв в сухом состоянии, Н, не менее	20
Воздухопроницаемость, дм ³ /(м ² ·с), не менее	50

1.10 Колпак медицинский на завязках


1.10.1 Колпак медицинский на завязках изготавливается цилиндрической формы, состоит из передней и тыльной части стенки, притачного донышка и двух завязок, втаченных в швы соединения деталей стенки.

1.10.2 Параметры размеров колпака медицинского на завязках соответствуют значениям, приведенным в таблице 19.

Таблица 19 – Параметры колпака медицинского на завязках

Наименование параметра	Размер					Допускаемое отклонение
	54	56	58	60	62	
Длина стенки колпака, сложенного вдвое, см	54	56	58	60	62	±0,5
Высота стенки колпака, см	18	18	18	18	18	±0,5

1.10.3 Схема измерения параметров размеров колпака медицинского на завязках представлена на рисунке 12.

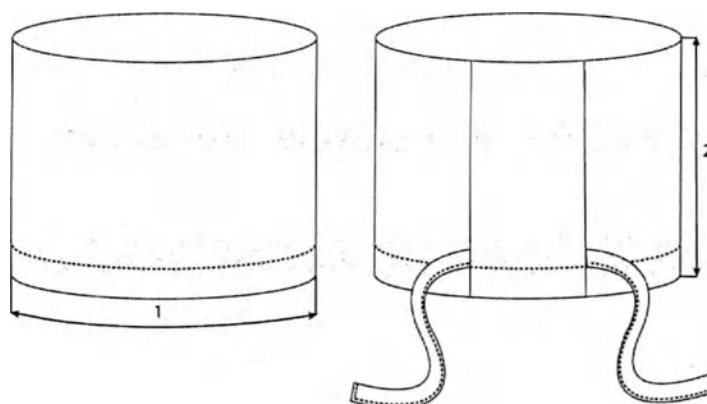

1 – Длина стенки колпака, сложенного вдвое; 2 – Высота стенки колпака

Рисунок 12 – Схема измерения параметров колпака медицинского на завязках

1.10.4 Масса колпака медицинского на завязках без упаковки составляет не более 50 г.

1.10.5 Колпак медицинский на завязках снабжен завязками в качестве средства фиксации.

1.10.6 Функциональные характеристики колпака медицинского на завязках соответствуют значениям, приведенным в таблице 20.

Таблица 20 – Функциональные характеристики колпака медицинского на завязках

Наименование параметра	Значение
Допустимая проницаемость микроорганизмами материалов и швов, %, не более	22
Чистота микробная, КОЕ/дм ² , менее	300
Прочность на разрыв в сухом состоянии, Н, не менее	20
Воздухопроницаемость, дм ³ /(м ² ·с), не менее	50

1.11 Фартук медицинский на завязках


1.11.1 Фартук медицинский на завязках изготавливается с цельнокроеным нагрудником и накладным карманом. Бретели притачаны к верхней части нагрудника. К верхним боковым углам вставлены пояса для завязывания.

1.11.2 Параметры размеров фартука медицинского на завязках соответствуют значениям, приведенным в таблице 21.

Таблица 21 – Параметры фартука медицинского на завязках

Наименование параметра	Размер							Допускаемое отклонение
	60	62	64	66	68	70	72	
Длина посередине переда от верхнего края до низа, см	86	86	86	86	86	86	86	±1,0
Ширина нагрудника в верхней части, см	25	25	25	25	25	25	25	±1,0
Ширина на уровне боковых углов, см	70	72	74	76	78	80	82	±1,0
Ширина внизу по прямой от одного края до другого, см	80	82	84	86	88	90	92	±1,0

1.11.3 Схема измерения параметров размеров фартука медицинского на завязках представлена на рисунке 13.

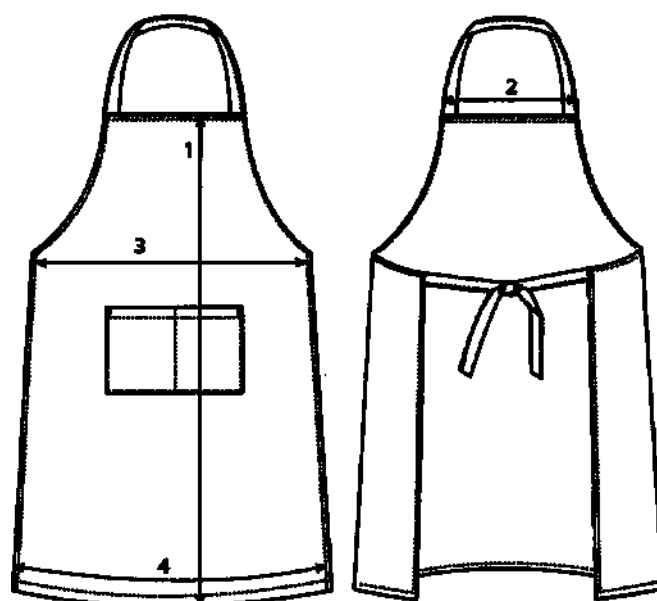

1 – Длина посередине переда от верхнего края до низа; 2 – Ширина нагрудника в верхней части; 3 – Ширина на уровне боковых углов; 4 – Ширина внизу по прямой от одного края до другого

Рисунок 13 – Схема измерения параметров фартука медицинского на завязках

1.11.4 Масса фартука медицинского на завязках без упаковки составляет не более 150 г.

1.11.5 Фартук медицинский снабжен завязками в качестве средства фиксации.

1.11.6 Функциональные характеристики фартука медицинского на завязках соответствуют значениям, приведенным в таблице 22.

Таблица 22 – Функциональные характеристики фартука медицинского на завязках

Наименование параметра	Значение
Допустимая проницаемость микроорганизмами материалов и швов, %, не более	22
Чистота микробная, КОЕ/дм ² , менее	300
Прочность на разрыв в сухом состоянии, Н, не менее	20
Воздухопроницаемость, дм ³ /(м ² ·с), не менее	50

1.12 Бахилы медицинские на завязках


1.12.1 Бахилы медицинские на завязках изготавливаются в виде сапог с длинным голенищем с завязками, удерживающими их под коленями.

1.12.2 Параметры размеров бахил медицинских на завязках соответствуют значениям, приведенным в таблице 23.

Таблица 23 – Параметры бахил медицинских на завязках

Наименование параметра	Значение	Допускаемое отклонение
Высота бахил	47	± 1 см
Ширина внизу	38	± 1 см
Ширина сверху	24	± 1 см

1.12.3 Схема измерения параметров размеров бахил медицинских на завязках представлена на рисунке 14.

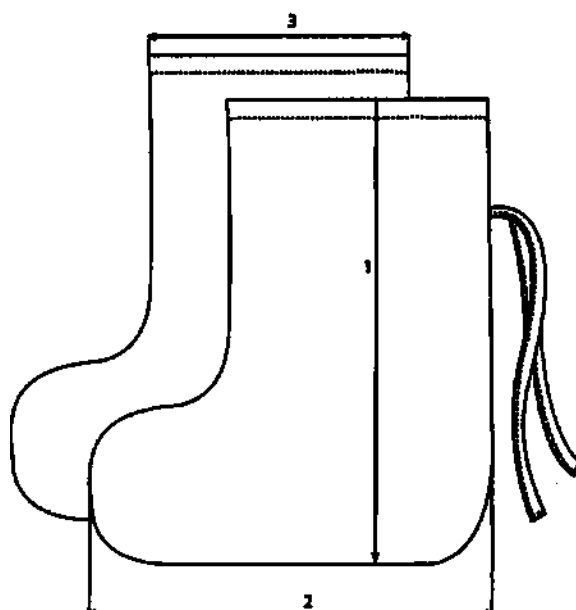

1 – Высота бахил; 2 – Ширина внизу; 3 – Ширина сверху

Рисунок 14 – Схема измерения параметров бахил медицинских на завязках

1.12.4 Масса бахил медицинских на завязках без упаковки составляет не более 100 г.

1.12.5 Бахилы медицинские снабжены завязками в качестве средства фиксации.

1.12.6 Функциональные характеристики бахил медицинских на завязках соответствуют значениям, приведенным в таблице 24.

Таблица 24 – Функциональные характеристики бахил медицинских на завязках

Наименование параметра	Значение
Допустимая проницаемость микроорганизмами материалов и швов, %, не более	22
Чистота микробная, КОЕ/дм ² , менее	300
Прочность на разрыв в сухом состоянии, Н, не менее	20
Воздухопроницаемость, дм ³ /(м ² ·с), не менее	50

1.13 Сведения о сырье и материалах изготовления

1.13.1 Сведения о сырье и материалах изготовления элементов комплекта приведены в таблице 25.

Таблица 25 – Сырье и материалы

Наименование изделия	Сырье и материалы	Производитель
Халат медицинский на завязках	Основной материал: Ткань смесовая, плотностью $150 \text{ г/м}^2 \pm 10\%$, состав: от 30% до 50% хлопчатобумажных волокон, от 50% до 70% синтетических волокон или Ткань хлопчатобумажная, плотностью $145 \text{ г/м}^2 \pm 5\%$, состав: 100% хлопчатобумажных волокон	ООО «Чайковская текстильная компания», Россия ООО «Фабрика «Красный Октябрь», Россия
	Элемент фиксации (завязки): Ткань смесовая, плотностью $150 \text{ г/м}^2 \pm 10\%$, состав: от 30% до 50% хлопчатобумажных волокон, от 50% до 70% синтетических волокон или Ткань хлопчатобумажная, плотностью $145 \text{ г/м}^2 \pm 5\%$, состав: 100% хлопчатобумажных волокон	ООО «Чайковская текстильная компания», Россия ООО «Фабрика «Красный Октябрь», Россия
	Основной материал: Ткань смесовая, плотностью $150 \text{ г/м}^2 \pm 10\%$, состав: от 30% до 50% хлопчатобумажных волокон, от 50% до 70% синтетических волокон или Ткань хлопчатобумажная, плотностью $145 \text{ г/м}^2 \pm 5\%$, состав: 100% хлопчатобумажных волокон	ООО «Чайковская текстильная компания», Россия ООО «Фабрика «Красный Октябрь», Россия
Халат медицинский женский на застежке	Основной материал: Ткань смесовая, плотностью $150 \text{ г/м}^2 \pm 10\%$, состав: от 30% до 50% хлопчатобумажных волокон, от 50% до 70% синтетических волокон или Ткань хлопчатобумажная, плотностью $145 \text{ г/м}^2 \pm 5\%$, состав: 100% хлопчатобумажных волокон	ООО «Чайковская текстильная компания», Россия ООО «Фабрика «Красный Октябрь», Россия
	Застежка (пуговицы): Пуговицы пластиковые диаметр 17 мм (100% полипропилен) или Застежка (кнопки): Кнопки металлические диаметр 10,5 мм (100% сталь) или Застежка (молния): Молния витая №5 (100% полиэстер)	ООО «ТД Фурнишоп», Россия ООО «Оптовая Швейная Компания», Россия ООО «Оптовая Швейная Компания», Россия
	Основной материал: Ткань смесовая, плотностью $150 \text{ г/м}^2 \pm 10\%$, состав: от 30% до 50% хлопчатобумажных волокон, от 50% до 70% синтетических волокон или Ткань хлопчатобумажная, плотностью $145 \text{ г/м}^2 \pm 5\%$, состав: 100% хлопчатобумажных волокон	ООО «Чайковская текстильная компания», Россия ООО «Фабрика «Красный Октябрь», Россия
Халат медицинский мужской на застежке	Основной материал: Ткань смесовая, плотностью $150 \text{ г/м}^2 \pm 10\%$, состав: от 30% до 50% хлопчатобумажных волокон, от 50% до 70% синтетических волокон или Ткань хлопчатобумажная, плотностью $145 \text{ г/м}^2 \pm 5\%$, состав: 100% хлопчатобумажных волокон	ООО «Чайковская текстильная компания», Россия ООО «Фабрика «Красный Октябрь», Россия

Наименование изделия	Сырье и материалы	Производитель
	Застежка (пуговицы): Пуговицы пластиковые диаметр 17 мм (100% полипропилен) или Застежка (кнопки): Кнопки металлические диаметр 10,5 мм (100% сталь)	ООО «ТД Фурнишоп», Россия ООО «Оптовая Швейная Компания», Россия
Куртка медицинская	Основной материал: Ткань смесовая, плотностью 150 г/м ² ± 10%, состав: от 30% до 50% хлопчатобумажных волокон, от 50% до 70% синтетических волокон или Ткань хлопчатобумажная, плотностью 145 г/м ² ± 5%, состав: 100% хлопчатобумажных волокон	ООО «Чайковская текстильная компания», Россия ООО «Фабрика «Красный Октябрь», Россия
Блуза медицинская женская	Основной материал: Ткань смесовая, плотностью 150 г/м ² ± 10%, состав: от 30% до 50% хлопчатобумажных волокон, от 50% до 70% синтетических волокон или Ткань хлопчатобумажная, плотностью 145 г/м ² ± 5%, состав: 100% хлопчатобумажных волокон	ООО «Чайковская текстильная компания», Россия ООО «Фабрика «Красный Октябрь», Россия
	Застежка (пуговицы): Пуговицы пластиковые диаметр 17 мм (100% полипропилен) или Застежка (кнопки): Кнопки металлические диаметр 10,5 мм (100% сталь) или Застежка (молния): Молния витая №5 (100% полиэстер)	ООО «ТД Фурнишоп», Россия ООО «Оптовая Швейная Компания», Россия ООО «Оптовая Швейная Компания», Россия
Блуза медицинская мужская	Основной материал: Ткань смесовая, плотностью 150 г/м ² ± 10%, состав: от 30% до 50% хлопчатобумажных волокон, от 50% до 70% синтетических волокон или Ткань хлопчатобумажная, плотностью 145 г/м ² ± 5%, состав: 100% хлопчатобумажных волокон	ООО «Чайковская текстильная компания», Россия ООО «Фабрика «Красный Октябрь», Россия
	Застежка (пуговицы): Пуговицы пластиковые диаметр 17 мм (100% полипропилен) или Застежка (кнопки): Кнопки металлические диаметр 10,5 мм (100% сталь)	ООО «ТД Фурнишоп», Россия ООО «Оптовая Швейная Компания», Россия
Брюки медицинские Брюки медицинские женские	Основной материал: Ткань смесовая, плотностью 150 г/м ² ± 10%, состав: от 30% до 50% хлопчатобумажных волокон, от 50% до 70% синтетических волокон	ООО «Чайковская текстильная компания», Россия

Наименование изделия	Сырье и материалы	Производитель
Брюки медицинские мужские	или Ткань хлопчатобумажная, плотностью $145 \text{ г/м}^2 \pm 5\%$, состав: 100% хлопчатобумажных волокон	ООО «Фабрика «Красный Октябрь», Россия
	Элемент фиксации (резинка на поясе): Тесьма эластичная резинка 35 мм белая (74% полиэфир, 26% латекс)	ООО «ТД Фурнишоп», Россия
Колпак медицинский на завязках	Основной материал: Ткань смесовая, плотностью $150 \text{ г/м}^2 \pm 10\%$, состав: от 30% до 50% хлопчатобумажных волокон, от 50% до 70% синтетических волокон	ООО «Чайковская текстильная компания», Россия
	или Ткань хлопчатобумажная, плотностью $145 \text{ г/м}^2 \pm 5\%$, состав: 100% хлопчатобумажных волокон	ООО «Фабрика «Красный Октябрь», Россия
	Элемент фиксации (завязки): Ткань смесовая, плотностью $150 \text{ г/м}^2 \pm 10\%$, состав: от 30% до 50% хлопчатобумажных волокон, от 50% до 70% синтетических волокон	ООО «Чайковская текстильная компания», Россия
	или Ткань хлопчатобумажная, плотностью $145 \text{ г/м}^2 \pm 5\%$, состав: 100% хлопчатобумажных волокон	ООО «Фабрика «Красный Октябрь», Россия
Фартук медицинский на завязках	Основной материал: Ткань смесовая, плотностью $150 \text{ г/м}^2 \pm 10\%$, состав: от 30% до 50% хлопчатобумажных волокон, от 50% до 70% синтетических волокон	ООО «Чайковская текстильная компания», Россия
	или Ткань хлопчатобумажная, плотностью $145 \text{ г/м}^2 \pm 5\%$, состав: 100% хлопчатобумажных волокон	ООО «Фабрика «Красный Октябрь», Россия
	Элемент фиксации (завязки): Ткань смесовая, плотностью $150 \text{ г/м}^2 \pm 10\%$, состав: от 30% до 50% хлопчатобумажных волокон, от 50% до 70% синтетических волокон	ООО «Чайковская текстильная компания», Россия
	или Ткань хлопчатобумажная, плотностью $145 \text{ г/м}^2 \pm 5\%$, состав: 100% хлопчатобумажных волокон	ООО «Фабрика «Красный Октябрь», Россия
Бахилы медицинские на завязках	Основной материал: Ткань смесовая, плотностью $150 \text{ г/м}^2 \pm 10\%$, состав: от 30% до 50% хлопчатобумажных волокон, от 50% до 70% синтетических волокон	ООО «Чайковская текстильная компания», Россия
	или Ткань хлопчатобумажная, плотностью $145 \text{ г/м}^2 \pm 5\%$, состав: 100% хлопчатобумажных волокон	ООО «Фабрика «Красный Октябрь», Россия

Наименование изделия	Сырье и материалы	Производитель
	Элемент фиксации (завязки): Ткань смесовая, плотностью $150 \text{ г/м}^2 \pm 10\%$, состав: от 30% до 50% хлопчатобумажных волокон, от 50% до 70% синтетических волокон или Ткань хлопчатобумажная, плотностью $145 \text{ г/м}^2 \pm 5\%$, состав: 100% хлопчатобумажных волокон	ООО «Чайковская текстильная компания», Россия ООО «Фабрика «Красный Октябрь», Россия

2 СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

2.1 Комплектность поставки

Одежда медицинская многоразовая нестерильная по ТУ 14.12.30-001-24361398-2024, варианты исполнения:

1. Одежда медицинская многоразовая нестерильная №1, в составе:

1.1. Халат медицинский на завязках, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 – 1 шт;

1.2. Колпак медицинский на завязках, размер: 54, 56, 58, 60, 62 – 1 шт;

1.3. Фартук медицинский на завязках, размер: 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 (при необходимости) – 1 шт;

1.4. Бахилы медицинские на завязках (при необходимости) – 1 пара;

1.5. Инструкция по применению – 1 шт.

2. Одежда медицинская многоразовая нестерильная №2, в составе:

2.1. Халат медицинский мужской на застежке, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 – 1 шт;

2.2. Колпак медицинский на завязках, размер: 54, 56, 58, 60, 62 – 1 шт;

2.3. Инструкция по применению – 1 шт.

3. Одежда медицинская многоразовая нестерильная №3, в составе:

3.1. Халат медицинский женский на застежке, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 – 1 шт;

3.2. Колпак медицинский на завязках, размер: 54, 56, 58, 60, 62 – 1 шт;

3.3. Инструкция по применению – 1 шт.

4. Одежда медицинская многоразовая нестерильная №4, в составе:

4.1. Блуза медицинская мужская, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 – 1 шт;

4.2. Брюки медицинские мужские, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 – 1 шт;

4.3. Инструкция по применению – 1 шт.

5. Одежда медицинская многоразовая нестерильная №5, в составе:

5.1. Блуза медицинская женская, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 – 1 шт;

5.2. Брюки медицинские женские, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 – 1 шт;

5.3. Инструкция по применению – 1 шт.

6. Одежда медицинская многоразовая нестерильная №6, в составе:

6.1. Куртка медицинская, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 – 1 шт;

6.2. Брюки медицинские, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 – 1 шт;

6.3. Инструкция по применению – 1 шт.

7. Одежда медицинская многоразовая нестерильная №7, в составе:

7.1. Куртка медицинская, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 – 1 шт;

7.2. Брюки медицинские, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 – 1 шт;

7.3. Колпак медицинский на завязках, размер: 54, 56, 58, 60, 62 – 1 шт;

7.4. Халат медицинский на завязках, размер: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66, 68-70, 72-74, 76-78, 80-82, 84-86, рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 (при необходимости) – 1 шт;

7.5. Фартук медицинский на завязках, размер: 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 (при необходимости) – 1 шт;

7.6. Бахилы медицинские на завязках (при необходимости) – 1 пара;

7.7. Инструкция по применению – 1 шт.

2.2 Указания по применению

2.2.1 Срок годности медицинского изделия составляет 2 года с даты изготовления.

2.2.2 Для применения следует:

- убедиться в целостности упаковки;
- вскрыть упаковку;
- убедиться в отсутствии дефектов;
- надеть элементы комплекта поверх тонкой одежды и зафиксировать их положения с помощью элементов фиксации.

2.2.3 При появлении на изделиях повреждений в процессе эксплуатации, необходимо прекратить эксплуатацию и утилизировать поврежденное изделие.

2.2.4 Комплект предназначен для применения поверх тонкой одежды одним специалистом.

2.2.5 По окончании применения комплекта следует произвести его санитарную обработку.

2.2.6 Максимальное количество циклов санитарной обработки – 50 циклов.

2.3 Санитарная обработка

Изделие подлежит санитарной обработке после использования, намокания или загрязнения.

Метод санитарно-гигиенической обработки состоит из следующего цикла:

а) дезинфекцию проводят способом полного погружения костюма в дезинфицирующий агент, находящийся в специальной емкости из стекла, пластмассы или металла, покрытого эмалью без повреждений.

Применяют один из дезинфицирующих агентов и режимов дезинфекции:

1) Хлоргексидина спиртовой 0,5 % раствор (Россия). Концентрация раствора: без разведения.

Время выдержки: 30 минут;

2) Водный 3 % раствор Хлорамина (Россия). Время выдержки: 60 мин.

3) Дезинфекционный раствор Велтосепт (Россия). Концентрация раствора: без разведения.

Время выдержки: 15 мин.

б) отмывку проводят машинной стиркой в растворе моющего средства типа «Лотос» при максимальной температуре стирки 60 °С для смесовых тканей и 95 °С для хлопчатобумажных тканей и мягком режиме процесса стирки (максимальная скорость отжима не более 600 об/мин);

в) просушку проводят в тени, при температуре окружающего воздуха (23±5) °С до полного высыхания.

2.4 Маркировка

2.4.1 Маркировка выполнена в соответствии с требованиями ТУ 14.12.30-001-24361398-2024.

2.4.2 Расшифровка символов маркировки групповой упаковки и маркировки транспортной тары приведена в таблице 26.

Таблица 26

Изображение символа	Расшифровка символа
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Код партии
	Не стерильно
	Температурный диапазон
	Диапазон влажности
	Не допускать воздействия влаги

2.5 Упаковка

2.5.1 Упаковка обеспечивает полную сохранность элементов комплекта, защищает их от климатических воздействий, загрязнений, повреждения во время хранения и перевозки выбранным видом транспорта с учетом возможных перегрузок в пути.

2.5.2 Одежда в количестве 1 комплект помещается в групповую упаковку Пакет упаковочный с клеевым клапаном: полиэтилен 100 %, произведенный под высоким давлением по ГОСТ 12302. Размер пакета не более 50x40 см

2.5.3 Изделия, упакованные в групповую упаковку, помещаются в транспортную тару – короб из гофрированного картона по ГОСТ Р 52901 в количестве до 50 комплектов. Размеры тары не более 700x350x410 мм, максимальный допустимый вес груза — до 30 кг

2.6 Хранение

2.6.1 Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80% при температуре плюс 25 °С в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах.

2.7 Транспортирование

2.7.1 Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для соответствующего вида транспорта.

2.7.2 Условия транспортирования изделия – при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80% при температуре плюс 25 °С

2.8 Утилизация

2.8.1 Утилизация изделия должна проводится согласно правилам и нормативам СанПиН 2.1.3684.

2.8.2 Изделия, не использованные по назначению, соответствуют классу медицинских отходов А.

2.8.3 Изделия, использованные по назначению, соответствуют классу медицинских отходов Б.

2.8.4 В случае контакта с больными инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, изделия относят к классу В.

2.8.5 Отходы класса А утилизируют как бытовые отходы.

2.8.6 Отходы классов Б и В подлежат обеззараживанию физическим (паровым) или химическим (погружением в раствор дезинфицирующего средства) методом. Обеззараженные отходы утилизируют термическим способом централизованно.

2.8.7 При утилизации пользователям рекомендуется помещать изделие в отдельный пакет для снижения риска распространения инфекции до централизованной утилизации уполномоченной организацией.

2.8.8 Групповая упаковка изделия и транспортная тара не требуют специальной утилизации и утилизируются как бытовые отходы.

3 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.

3.2 Изделия после использования, намокания или загрязнения устойчивы к санитарно-гигиенической обработке согласно методу п.2.3 настоящей инструкции в течение 50 циклов в пределах срока годности.

3.3 Срок годности медицинского изделия составляет 2 года с даты изготовления.

4 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное предприятие «Гранд»
(ООО МПП «Гранд»)**

**Адрес места нахождения: 428022, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, Г.
ЧЕБОКСАРЫ, УЛ. КОСМОНАВТА НИКОЛАЕВА А.Г., Д. 29Б, ОФИС 201**

Номер телефона: +7(8352)28-00-11

Адрес электронной почты: grandcheb@yandex.ru

5 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, НА КОТОРУЮ ДАНЫ ССЫЛКИ

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 12302-2013	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ Р 52901-2007	Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1 Оценка и исследования в процессе менеджмента риска
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 37 (тридцать семь) листов
цифрами прописью

Директор ООО МПП «Гранд»

/ Андреев Э.Н.

