


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ВОЛЛ»

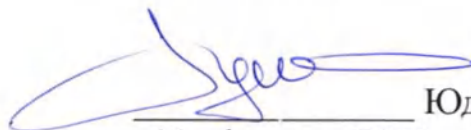

Юдин А.И.

«01» февраля 2025 г.

ФОТОМАТЕРИАЛЫ
медицинского изделия

«Респиратор медицинский одноразовый по ТУ 32.50.50-063-44234511-2025»

производства ООО «ВОЛЛ», Россия



Фото 1. Респиратор медицинский одноразовый по ТУ 32.50.50-063-44234511-2025
вариант исполнения: WALL 99 H NR D



Фото 2. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-063-44234511-2025
вариант исполнения: WALL 99 H NR D (передняя сторона)

Респиратор медицинский
одноразовый
по ТУ 32.50.50-063.44234511-2025
вариант исполнения WALL 99 H NR D
Тип респиратора
Респиратор относится к
Тип II по ГОСТ Р 58396-2019
Регистрационное удостоверение:
№ РЗН хххх/ххххх
ООО «ВОЛЛ»
346885, Ростовская Область,
г.о. Город Батайск, г Батайск,
ул Энгельса, д. 57
Тел.: +7(863)207-55-75, contact@wall.com.ru

Прочтите инструкцию в месте приобретения/получения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПИРАТОРА

1. Эффективность бактериальной фильтрации респиратора $\geq 95\%$.
2. Дифференциальное давление респиратора $< 29,4 \text{ Па/см}^2$.
3. Микробиологическая чистота респиратора 30 КОЕ/г.
4. Прочность крепления фиксирующей ленты к респиратору не менее 20 Н.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Респиратор предназначен в качестве барьерного средства для ограничения передачи инфекционных агентов, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекции, передающихся воздушно-капельным путем.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия применения - в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, а также вне медицинских и лечебно-профилактических учреждений. Область применения - профилактика инфекционных заболеваний.

Потенциальный потребитель: сотрудники в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, пациенты и другие лица для снижения риска распространения инфекции, передающихся воздушно-капельным путем.

ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура - от 10 до 35 °C
Относительная влажность - 80 % при 25 °C
Атмосферное давление - (84,0 - 106,7) кПа [(630-800) мм рт.ст.]

РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, ВОЗМОЖНЫХ ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Показания к применению: в качестве барьерного средства для обеспечения профилактических мероприятий, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекции, передающихся воздушно-капельным путем. Противопоказания: не выявлены в рамках установленного производителем назначения.

Побочные эффекты: возможна индивидуальная аллергическая реакция на материалы респиратора. Риски применения медицинского изделия: класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н - 1.



ОБЪЕДЫСТОРОЖНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ РЕЗИНЬСКОЙ УПАКОВКИ ТАКОЙ РЕСПИРАТОР НЕЛЬЗЯ УТИЛИЗИРОВАТЬ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЕГО ЦЕЛОСТНОСТИ РЕСПИРАТОР ПОДЛЕЖИТ УТИЛИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА БОЛЕЕ В ЧАСОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА ЛЮБУЮ ОБРАБОТКУ РЕСПИРАТОРА ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ РЕСПИРАТОРА

Откройте упаковку на её целостность, после чего вскройте респиратор.
Проверьте целостность респиратора.
Разложите сложенный респиратор так, чтобы он принял форму лица. Убедитесь в том, что панели полностью раскрыты. Рисунок 1.
Фиксируйте респиратор сначала на подбородке затем на лбу. Рисунок 2.
Наденьте верхнюю фиксирующую ленту на затылке, а нижнюю на шее так, чтобы респиратор плотно прилегал к лицу. Фиксирующие ленты не должны быть перекручены и пересекаться между собой. Рисунок 3.
С помощью обеих рук обожмите носовой зажим в соответствии с формой носа для обеспечения плотного прилегания и хорошего уплотнения. При обжимании носового зажима только одной рукой, может быть снижена эффективность респиратора. Рисунок 4.
После того, как приступите к работе, необходимо убедиться в том, что респиратор плотно прилегает к лицу.
Использование НЕ БОЛЕЕ В ЧАСОВ.
Утилизируйте использованный респиратор в соответствии с инструкцией по применению.



УТИЛИЗАЦИЯ

Респиратор должен храниться в потребительской упаковке. Хранения 1 (от 5 до 40 °C при относительной влажности до 80 % при 25 °C) по ГОСТ 15150-99 не более 5 лет со дня изготовления.

В процессе хранения респиратор в потребительской упаковке должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, смазочных масел, бензина, керосина, агрессивных и других веществ, способных разрушать материалы прибора.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ

Нестерильно		Не использовать при повреждении упаковки
Беречь от солнечных лучей		Беречь от влаги
Предельная температура от 5 °C до 40 °C		Предельная влажность 80%
Запрет на повторное применение		Срок годности в упаковке 60 месяцев

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ПАРТИИ: 02-02/2025
СРОК ГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ

Фото 3. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-063-44234511-2025 вариант исполнения: WALL 99 H NR D (задняя сторона)



Фото 4. Респиратор медицинский одноразовый по ТУ 32.50.50-063-44234511-2025
вариант исполнения: WALL 99 HK NR D


WALL

**РЕСПИРАТОР
МЕДИЦИНСКИЙ**

одноразовый

по ТУ 32.50.50-063-44234511-2025

вариант исполнения: WALL 99 HK NR D

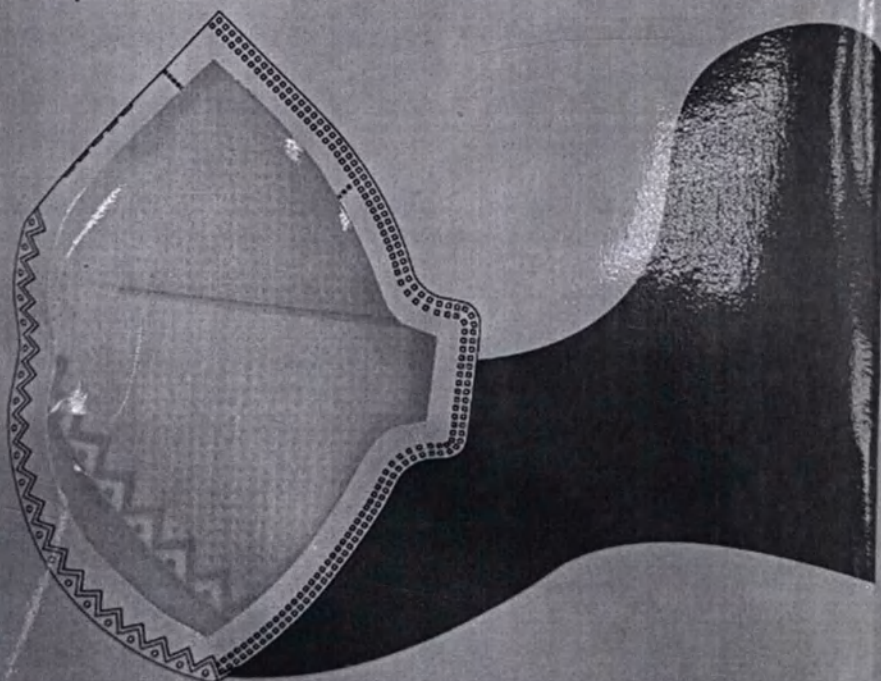

WALL.COM.RU

1 шт.

Фото 5. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-063-44234511-2025
вариант исполнения: WALL 99 HK NR D (передняя сторона)

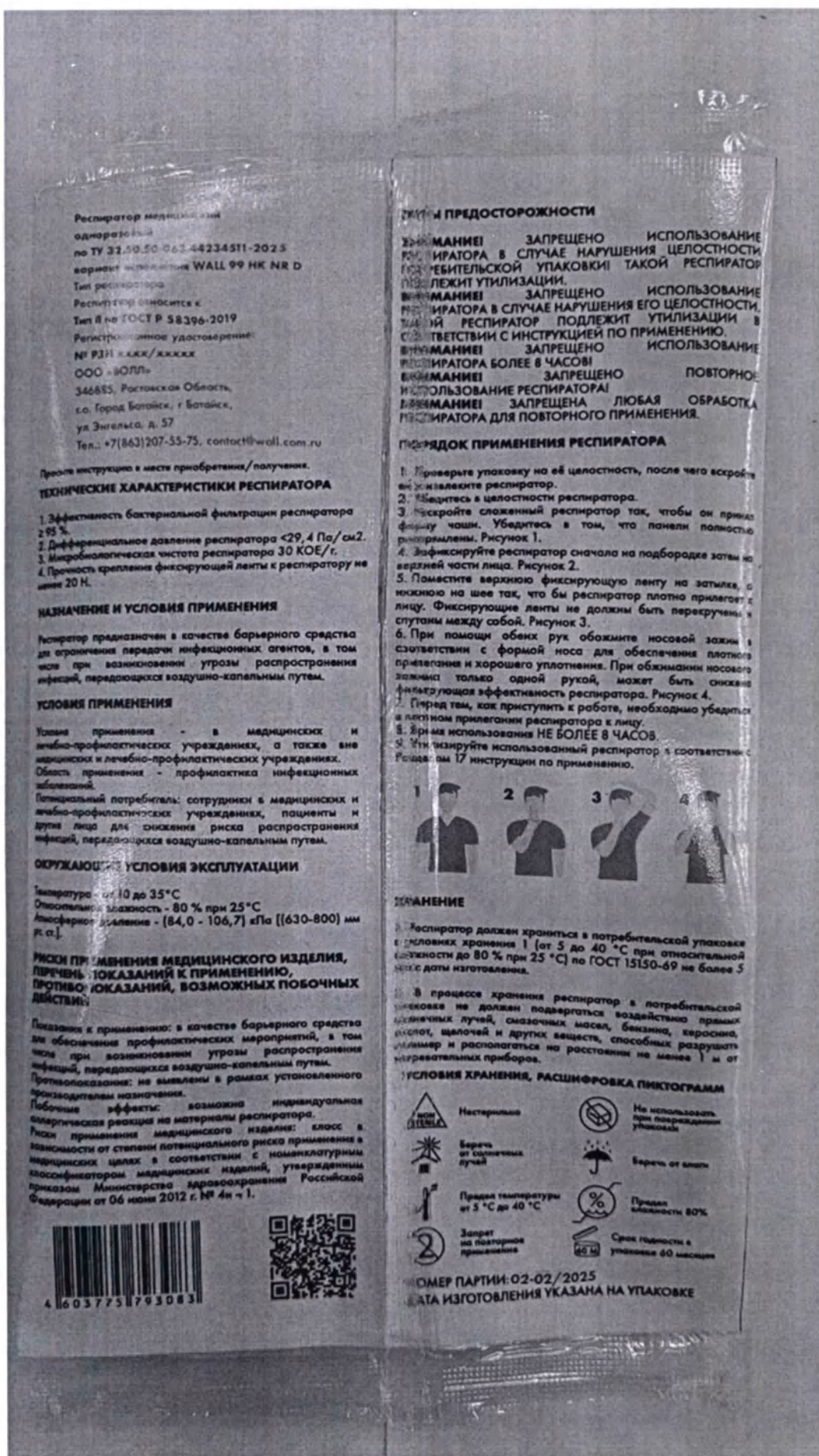


Фото 6. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-063-44234511-2025 вариант исполнения: WALL 99 HK NR D (задняя сторона)



Фото 7. Респиратор медицинский одноразовый по ТУ 32.50.50-063-44234511-2025
вариант исполнения: WALL 99 CHK NR D



Фото 8. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-63-44234511-2025
вариант исполнения: WALL 99 CHK NR D (передняя сторона)

Респиратор медицинский
одноразовый
по ТУ 32.50.50-063-44234511-2025
вариант исполнения WALL 99 CHK NR D
Тип респиратора
Респиратор относится к
Тип II по ГОСТ Р 58396-2019
Регистрационное удостоверение:
№ РЗН хххх/ххххх
ООО «ВОЛП»
346885, Ростовская Область,
с.п. Город Батайск, г. Батайск,
ул. Зинькова, д. 57
Тел.: +7(863)207-55-75, contact@wall.com.ru

Прочие инструкции по использованию см. на сайте производителя/получателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПИРАТОРА

1. Эффективность бактериальной фильтрации респиратора $\geq 95\%$.
2. Дифференциальное давление респиратора $< 29,4 \text{ Па/см}^2$.
3. Микробиологическая чистота респиратора 30 КОЕ/г.
4. Прочность крепления фиксирующей ленты к респиратору не менее 20 Н.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Респиратор предназначен в качестве барьерного средства для ограничения передачи инфекционных агентов, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия применения - в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, а также вне медицинских и лечебно-профилактических учреждениях. Область применения - профилактика инфекционных заболеваний.

Потенциальный потребитель: сотрудники в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, пациенты и другие лица для снижения риска распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура - от 10 до 35°C
Относительная влажность - 80 % при 25°C
Атмосферное давление - (84,0 - 106,7) кПа [(630-800) мм рт.ст.]

РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, ВОЗМОЖНЫХ ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Показаны к применению: в качестве барьерного средства для обеспечения профилактических мероприятий, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Противопоказания: не выявлены в рамках установленного назначения.

Побочные эффекты: возможна индивидуальная аллергическая реакция на материалы респиратора. Риск применения медицинского изделия: класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н-т.



ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ЛЕНТЫ УТИЛИЗАЦИИ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЕГО ЦЕЛОСТНОСТИ.
РЕСПИРАТОР ПОДЛЕЖИТ УТИЛИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА БОЛЕЕ 8 ЧАСОВ.
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПИРАТОРА.
ОБРАБОТКА РЕСПИРАТОРА ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ РЕСПИРАТОРА

Откройте упаковку на ее целостность, после чего вскройте и извлеките респиратор.
Проверьте целостность респиратора.
Сложите респиратор так, чтобы он прилегал к лицу. Убедитесь в том, что панели полностью закрыты. Рисунок 1.
Вскрыйте респиратор сначала на подбородке, затем на лбу. Рисунок 2.
Наденьте верхнюю фиксирующую ленту на затылке, а нижнюю на шее так, чтобы респиратор плотно прилегал к лицу. Фиксирующие ленты не должны быть перекручены и соприкасаться между собой. Рисунок 3.
С помощью обеих рук обхватите носовую зажимку и надавите с формой носа для обеспечения плотного прилегания и хорошего уплотнения. При обхвате носовой зажимки только одной рукой, может быть снижена эффективность респиратора. Рисунок 4.
После того, как приступите к работе, необходимо убедиться, чтобы респиратор плотно прилегал к лицу.
Срок использования НЕ БОЛЕЕ 8 ЧАСОВ.
Используйте использованный респиратор в соответствии с инструкцией 17 инструкции по применению.



ХРАНЕНИЕ

Респиратор должен храниться в герметичной упаковке. Срок хранения 1 (от 5 до 40 °C при относительной влажности до 80 % при 25 °C) по ГОСТ 15150-07 не более 5 лет со дня изготовления.

В процессе хранения респиратор в потребительской упаковке не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, смазочных масел, бензина, керосина, щелочей и других веществ, способных разрушить материал и располагаться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, РАСШИФРОВКА ПИКТОГРАММ

Нестерильно	Не использовать при повреждении упаковки
Берегайте от солнечных лучей	Берегайте от влаги
Предел температуры от 5 °C до 40 °C	Предел влажности 80%
Запрет на повторное применение	Срок годности в упаковке 60 месяцев

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ПАРТИЯ: 02-02/2025
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ

Фото 9. Упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-063-44234511-2025 вариант исполнения: WALL 99 CHK NR D (задняя сторона)

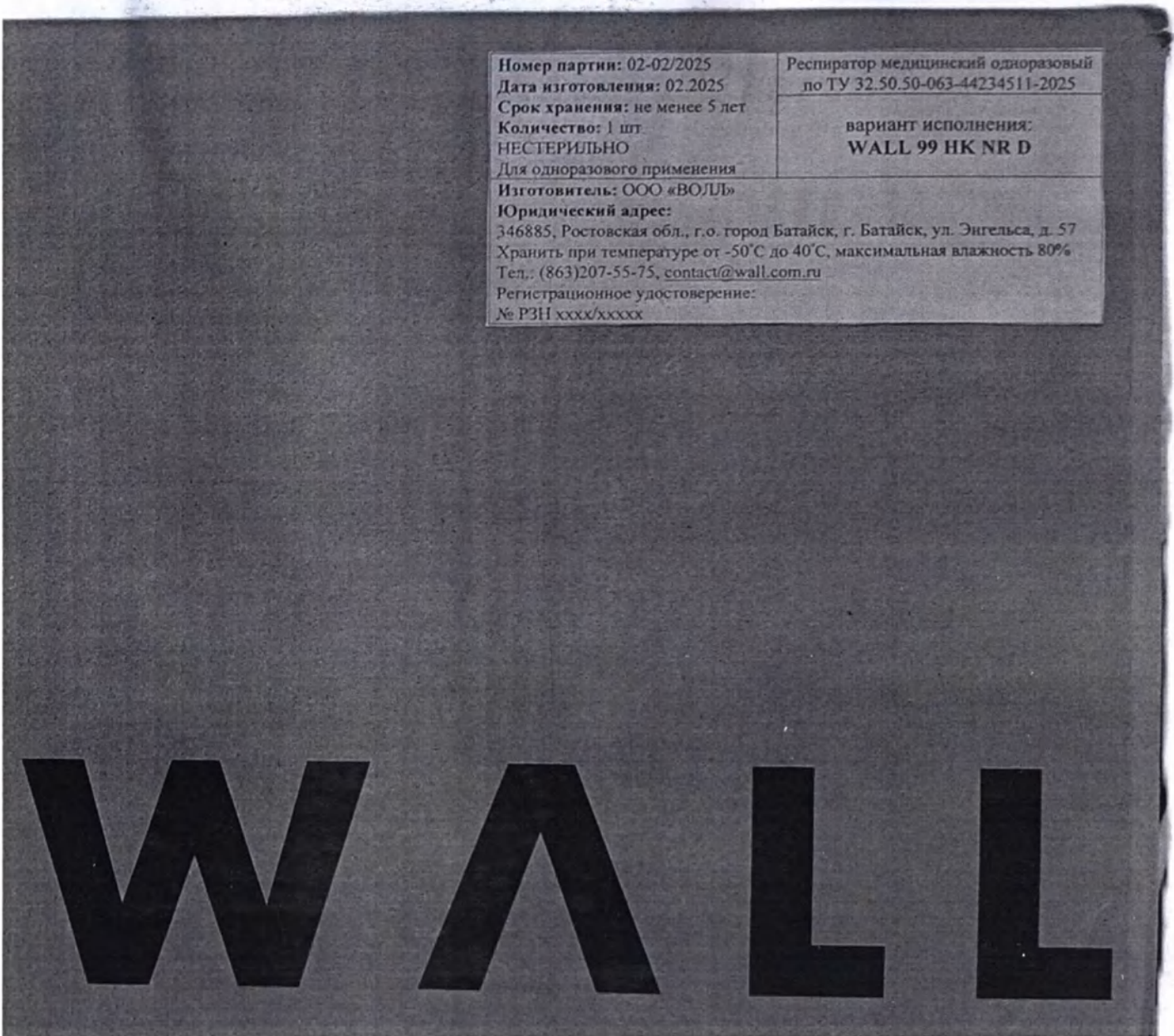


Фото 10. Грушковая упаковка респиратора медицинского одноразового по ТУ 32.50.50-063-44234511-2025 вариант исполнения: WALL 99 HK NR D

**Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью**

11 (одиннадцать) листов
цифрами прописью

Должность: Генеральный директор

Подпись [подпись] /Юдин А.И.

« 01 » февраля 2025 г. М.П.



[подпись]